

NÁVOD K OBSLUZE

BeautyRelax BR-3100 BODYFACE MULTISHAPE MADERO PROFESSIONAL



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	6
SLOVO ÚVODEM	7
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	8
UPOZORNĚNÍ	10
KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT	11
ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	12
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	12
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - RADIOFREKVENCE	12
POVOLENÉ PARTIE APLIKAE – ČERVENÉ SVĚTLO 650NM	13
DOPORUČENÍ	13
POUŽITÍ SONOGELU	13
HLAVNÍ VÝHODY	14
VLASTNOSTI PŘÍSTROJE	14
TECHNICKÉ PARAMETRY	15
OBSAH BALENÍ	15
URČENO PRO VŠECHNY TYPY POSTAV	16
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	17
METODY REDUKCE VRÁSEK	17
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	18
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	19
RADIOFREKVENCE	19
VAKUOVÉ NASÁVÁNÍ S RADIOFREKVENCÍ	20
ČERVENÉ SVĚTLO	21
ELEKTROFORÉZA - NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE	21
EMS	22
FOTONOVÉ SVĚTLO	23
TEPELNÁ TERAPIE - PŮSOBENÍ CHLADU	25
POPIS PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA	26
POPIS PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE	28
POPIS HLAVNÍ NABÍDKY PŘÍSTROJE	29
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - RADIOFREKVENCE	31
POUŽITÍ HLAVICE S RADIOFREKVENCÍ	32
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ULTRAZVUK	37
POUŽITÍ HLAVICE S ULTRAZVUKEM	38

OBSAH:

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - VAKUOVÁ HLAVICE	39
POUŽITÍ HLAVICE S VAKUOVOU MASÁŽÍ	40
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ČERVENÉ SVĚTLO	43
POUŽITÍ HLAVIC S ČERVENÝM SVĚTLEM	44
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - PŮSOBENÍ CHLADU	45
POUŽITÍ HLAVICE S PŮSOBENÍM CHLADU	46
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ELEKTROFORÉZA	47
POUŽITÍ HLAVICE S FUNKCÍ ELEKTROFORÉZY	48
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - EMS	49
POUŽITÍ HLAVICE S FUNKCÍ EMS PULZŮ	50
INSTALACE PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE	51
INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁKY NA HLAVICE	51
INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ FILTR	52
INSTALACE PŘÍSTROJE - FILTRAČNÍ TAMPÓNEK	52
NASTAVENÍ INTENZITY ULTRAZVUKU	53
ČAS APLIKACE - ULTRAZVUK	54
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	55
UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - ULTRAZVUK	56
DÉLKA A FREKVENCE POUŽITÍ HLAVIC	60
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ČERVENÉHO SVĚTLA	61
PŘÍKLADY POUŽITÍ HLAVIC S ČERVENÝM SVĚTLEM	62
UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - VAKUOVÉ SÁNÍ	64
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - VAKUOVÉ SÁNÍ	66
ČAS APLIKACE - RADIOFREKVENCE	67
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	68
METODA APLIKACE OBLIČEJE KRKU DEKOLTU	71
MAPA CITLIVOSTI PLETI	74
DOPORUČENÁ METODA POUŽITÍ HLAVIC	75
RADIOFREKVENCE VE TŘECH PROVEDENÍCH	75
SMĚRY POHYBU HLAVICE NA TVÁŘI S VAKUOVOU HLAVICÍ	78
BEAUTYRELAX VIDEO NA YOUTUBE	79
ÚČEL POUŽITÍ OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE	80

OBSAH:

UVOLNĚNÍ SVALŮ/REDUKCE CELULITIDY	81
POUŽITÍ MASÁŽNÍHO OLEJE NEBO GELU	82
HLAVNÍ BENEFITY OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE	83
VÝZNAM APLIKAČNÍCH HLAVIC OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE	85
MOŽNOSTI POUŽITÍ OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE	86
BEAUTYRELAX VIDEO NA YOUTUBE	89
POPIS OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE	90
POUŽITÍ OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE	91
ÚČEL POUŽITÍ MADERO VÁLCE	92
MADEROTERAPIE	93
VLASTNOSTI & SPECIFIKACE MADERO VÁLCE	97
POPIS MADERO VÁLCE	98
UVOLNĚNÍ RUKOJETI MADERO VÁLCE	101
ROZMĚRY MADERO VÁLCE	102
POUŽITÍ MADERO VÁLCE	103
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	104
ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU	106
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	108
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ CERTIFIKACE	109
EU DISTRIBUTOR	109
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	110

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – estetické přístroje pro domácí péči i profesionální provozy

BeautyRelax je česká značka zaměřená na vývoj a distribuci estetických přístrojů určených pro široké spektrum uživatelů. Od roku 2010 přinášíme řešení, která nacházejí uplatnění jak v domácí péči, tak v kosmetických salonech, wellness centrech a dalších profesionálních provozech. Díky širokému sortimentu si u nás může vybrat každý – od běžných uživatelů hledajících komfortní péči v domácím prostředí až po profesionály, kteří potřebují spolehlivé přístroje pro každodenní práci.

Jeden sortiment, mnoho možností využití

Přístroje BeautyRelax jsou navrženy s ohledem na různé úrovně zkušeností i rozdílné nároky na provoz. Nabídka zahrnuje jednodušší modely vhodné pro domácí použití i technicky pokročilejší zařízení určená pro profesionální prostředí.

Použité technologie vycházejí z běžně využívaných postupů v oblasti estetické péče, například:

- Radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud

Každý produkt je určen k používání v souladu s návodem výrobce a platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Pro domácí uživatele

Pro jednotlivce, kteří preferují péči v pohodlí domova, nabízí BeautyRelax přístroje:

- s jednoduchým ovládáním
- určené pro pravidelné osobní použití
- umožňující přizpůsobit péči individuálním potřebám

Domácí přístroje jsou navrženy tak, aby se mohly stát součástí běžné rutiny péče o pleť, tělo nebo vlasy.

Pro salony a profesionální provozy

Pro kosmetická studia, salony a wellness zařízení je v nabídce řada přístrojů:

- vhodných pro častější provoz
- s širšími možnostmi nastavení
- určených pro profesionální použití

Profesionální uživatelé mohou vybírat zařízení podle zaměření provozu, typu poskytovaných služeb a individuálních preferencí.

Přehled kategorií přístrojů

- **Kosmetické přístroje** – určené k péči o vzhled a komfort pleti
- **Přístroje pro péči o tělo** – zaměřené na estetickou péči o postavu
- **Masážní přístroje** – vhodné pro relaxaci a regeneraci
- **IPL přístroje** – určené k dlouhodobému omezení růstu chloupků při pravidelném používání

Výběr konkrétního přístroje vždy závisí na individuálních potřebách, zkušenostech uživatele a způsobu použití.

Každý si vybere to své

Ať už hledáte přístroj pro osobní péči doma, nebo zařízení pro profesionální salon, BeautyRelax nabízí široké spektrum možností. Díky rozmanité nabídce modelů, rozdílným technickým parametrům a různým úrovním obsluhy si u nás najde řešení každý uživatel. Rádi vám pomůžeme s výběrem přístroje, který bude odpovídat vašim požadavkům i plánovanému využití.

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení produktu BeautyRelax. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům a upozorněním. Přístroj používejte výhradně v souladu s uvedenými instrukcemi a doporučeními výrobce. Dodržování pokynů v tomto návodu přispívá k bezpečnému používání přístroje a jeho správné funkci. Tento návod slouží k seznámení s funkcemi přístroje a doporučeným způsobem jeho používání.

Obecná upozornění

Instrukce uvedené v tomto návodu berte prosím s náležitou vážností. Přístroj je určen pro estetickou a masážní péči a pracuje s technologiemi využívanými v oblasti neinvazivní estetické aplikace. Přístroj není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci jakýchkoli onemocnění.

Přístroj pracuje s regulovatelným výkonem. Intenzitu vždy nastavujte s ohledem na vlastní komfort a doporučení uvedená v návodu. Nepřekračujte doporučené hodnoty ani četnost použití.

Důležité informace o přístroji a jeho použití

- Estetický přístroj BeautyRelax je zařazen do kategorie masážních a estetických přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek** ve smyslu platné legislativy. Přístroj není určen k léčbě obezity, kožních onemocnění ani jiných zdravotních stavů.
- Přístroj je určen k **neinvazivnímu použití**, což znamená, že během aplikace nedochází k porušení integrity pokožky ani k pronikání aplikačních částí pod kůži.
- Přístroj splňuje požadavky platných technických a bezpečnostních norem vztahujících se na tento typ zařízení.
- Při používání přístroje je nutné aplikovat **vodivý gel (sonogel)** určený pro kosmetické nebo přístrojové použití. Gel slouží ke zlepšení kontaktu aplikační hlavičky s pokožkou a k zajištění správné funkce přístroje.
- Používejte přístroj pouze v doporučených intervalech. Častější nebo delší používání, než je uvedeno v návodu, **nezvyšuje účinnost** a může vést k nežádoucím reakcím pokožky.
- Výsledky používání se mohou lišit v závislosti na individuálních vlastnostech pokožky, způsobu použití a dodržování návodu k obsluze.

Podpora a dotazy

V případě nejasností, dotazů nebo pochybností ohledně používání přístroje se obraťte na naši zákaznickou podporu:

- Telefon: +420 737 196 160
- E-mail: mh@santadria.cz

Rádi vám poskytneme doplňující informace k obsluze přístroje.

Tento návod si pečlivě uschovejte pro případné pozdější použití.

Přejeme vám, aby vám přístroj BeautyRelax dobře sloužil při jeho používání v souladu s tímto návodem.

Tým BeautyRelax.cz

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Aplikace červeného světla s vlnovou délkou 650 nm patří mezi technologie využívané v oblasti **neinvazivní estetiké a masážní péče**. Přístroj je určen k povrchové aplikaci na vybrané partie těla a je navržen tak, aby nedocházelo k porušení integrity pokožky. Žádná část aplikační hlavičky během použití neproniká pod povrch kůže. Použití přístroje spadá do kategorie **neinvazivních aplikací**, při nichž může uživatel v průběhu použití vnímat mírné zahřívání pokožky v závislosti na zvoleném nastavení a individuální citlivosti. Přístroj je určen k používání výhradně v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze, zejména pokud jde o doporučený čas a frekvenci použití. Technologie červeného světla s vlnovou délkou 650 nm je při dodržení podmínek použití uvedených výrobcem považována za **nízkozatěžující formu estetiké péče**. Výsledky používání se mohou lišit v závislosti na individuálních vlastnostech pokožky a způsobu použití.



Použití v profesionálním provozu a hygiena

Přístroje využívající technologie neinvazivní estetiké péče jsou běžně používány v kosmetických, masážních a estetických provozech. Při **komerčním použití** je nutné dodržovat platné hygienické předpisy a provozní řády dané legislativou příslušné země. Po každém uživateli je nutné povrch aplikačních hlavic očistit a dezinfikovat vhodným dezinfekčním prostředkem určeným pro povrchy přicházející do styku s pokožkou. Doporučuje se použití dezinfekce na bázi alkoholu aplikované na čistý hadřík, následné otření aplikačních částí a jejich důkladné osušení.

Právní a legislativní upozornění

Estetický přístroj **BeautyRelax** je určen pro **relaxační a estetickou masážní péči**. **Nejedná se o zdravotnický prostředek** ve smyslu platné legislativy.

Přístroj není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci jakýchkoli onemocnění.

Přístroj:

- nevyužívá jehly ani invazivní technologie,
- nenarušuje integritu pokožky,
- je určen výhradně k povrchové aplikaci.

Součástí přístroje jsou technologie, jako je radiofrekvence, ultrazvuk, vakuová masáž a červené světlo. Podmínky jejich **komerčního využívání** (požadované vzdělání, licence nebo odborná způsobilost) se mohou lišit v závislosti na legislativě jednotlivých států Evropské unie. Provozovatel je povinen se před zahájením komerčního používání seznámit s platnými právními předpisy v místě provozu.

Odpovědnost

Distributor/prodejce **SANTADRIA s.r.o.** nenese odpovědnost za používání přístroje v rozporu s tímto návodem k obsluze nebo s platnou legislativou v zemi, kde je přístroj používán. Přístroj smí být v rámci komerčního provozu používán pouze osobami, které splňují zákonné podmínky stanovené příslušnými právními předpisy.

Distributor/prodejce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje, nedodržení hygienických postupů nebo překročení doporučených parametrů uvedených v návodu.

UPOZORNĚNÍ



- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, seznamte se se všemi vyobrazeními a návod si uschovejte pro případné pozdější použití.
- Nepoužívejte přístroj na pokožce postižené závažným kožním onemocněním, otevřenými ranami nebo podrážděním. V případě pochybností o vhodnosti používání přístroje doporučujeme konzultaci s lékařem.
- Pokud je přístroj používán více osobami, je nutné dodržovat zvýšené hygienické standardy. Po každém použití je třeba aplikační hlavice očistit a dezinfikovat vhodným prostředkem určeným pro povrchy přicházející do styku s pokožkou.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je mechanicky poškozený, nefunguje správně nebo byl vystaven působení vody.
- V případě poškození přístroje se nedotýkejte jeho vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj spadne na zem, může dojít k jeho poškození. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí (např. koupelna, sprcha, bazén).
- Přístroj není vodotěsný ani omyvatelný. Nesmí být ponořen do vody ani čištěn pod tekoucí vodou.
- Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Po každém použití jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě, pokud je to relevantní.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny, aby se zabránilo vzniku kondenzace.
- Přístroj není určen k používání dětmi ani osobami, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti neumožňují bezpečné používání bez dozoru.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na zdrojích tepla nebo v jejich bezprostřední blízkosti (např. radiátory, kamna, otevřený oheň).
- Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat, upravovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém a čistém prostředí, chráněném před prachem a vlhkostí.
- Během používání přístroj žádným způsobem nezakrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám.
- Distributor nenes odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v rozporu s tímto návodem k obsluze nebo bezpečnostními pokyny.
- Za škody na zdraví nebo majetku vzniklé v důsledku jiného než určeného způsobu použití přístroje nenes distributor odpovědnost v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT



Použití přístroje **není možné** u osob s těmito stavy:

- těhotenství
- nádorové onemocnění (aktuální nebo v anamnéze)
- kardiovaskulární onemocnění (včetně závažných srdečních onemocnění)
- implantovaný kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát
- epilepsie
- závažné poruchy nervového systému
- závažné poruchy imunitního systému
- žilní trombóza
- závažné poruchy krevního oběhu
- závažné poruchy srážlivosti krve
- těžká cukrovka (diabetes mellitus v závažném stadiu)
- závažné onemocnění jater nebo ledvin
- velmi vysoké hodnoty cholesterolu
- akutní virové onemocnění
- stav vysokých horeček
- anafylaxe
- chronický únavový syndrom
- hypertyreózou
- hypothyreózou
- jinými závažnými hormonálními poruchami
- polycystickými vaječníky
- na pokožce postižené aktivním kožním onemocněním
- na otevřených ranách, zánětech nebo podrážděné pokožce
- při fotosenzitivních kožních onemocněních
- v místě výskytu kovových implantátů nebo cizích těles
(výjimku tvoří zubní náhrady)
- u osob pod vlivem alkoholu nebo návykových látek
- u osob vyžadujících trvalý dohled
- během menstruace
- u osob, které nejsou schopny bezpečně vnímat průběh aplikace

V případě jakýchkoli pochybností o zdravotním stavu uživatele nebo vhodnosti použití přístroje **doporučujeme konzultaci s praktickým lékařem** před zahájením aplikace.

ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK

- Hlava
- Krk (přední i zadní strana)
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK

- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Stehna
- Zadeček
- Lýtka



Poznámka: párová oblast těla je brána jako jedna partie

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - RADIOFREKVENCE

- Obličej
- Krk
- Dekolt
- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Boční strana trupu
- Stehna
- Hýždě
- Lýtka



POVOLENÉ PARTIE APLIKAE – ČERVENÉ SVĚTLO 650NM

- Podbradek
- Paže
- Břicho
- Boky
- Stehna
- Lýtka
- Hýždě



DOPORUČENÍ

Přístroj využívá vysoce výkonné optické diody generující **červené světlo s vlnovou délkou 650 nm**, které je používáno v oblasti neinvazivní estetické péče. Intenzita světla je nastavena tak, aby při dodržení pokynů výrobce poskytovala požadované estetické účinky.

- Při používání přístroje se vždy vyhněte přímému pohledu do zdroje červeného světla.
- Před aktivací červeného světla si vždy nasadte ochranné textilní brýle, které jsou součástí balení.
- Přímé nasvícení očí může vést k poškození zraku.
- Přístroj nejprve správně přiložte na vybranou část těla, nasadte ochranné brýle a teprve poté aktivujte působení červeného světla.

Dodržování těchto pokynů je nezbytné pro bezpečné používání přístroje.

POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny a radiofrekvence se tak mohou na pleť lépe navázat. Při použití přístroje **nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.**



HLAVNÍ VÝHODY

- Přispívá k redukci výskytu jemných mimických vrásek.
- Napomáhá ke zlepšení pružnosti kontur obličeje.
- Podporuje zpevnění a vypnutí pleti.
- Stimuluje přirozené procesy spojené s remodelací kolagenních vláken.
- Napomáhá ke zmírnění viditelných projevů celulitidy.
- Přispívá ke zjemnění vzhledu strií a drobných jizviček.
- Podporuje stimulaci lymfatického systému končetin.
- Napomáhá k redukci tukové tkáně na vybraných tělesných partiích.
- Umožňuje provádění účinné podtlakové lymfatické masáže.
- Neinvazivní charakter aplikace bez porušení integrity pokožky.
- Bezpečné a komfortní používání při dodržení pokynů výrobce.
- Použití je zpravidla bez nepříjemných pocitů.

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

- Profesionální estetický přístroj určený pro použití na různých částech těla.
- Kombinuje více technologií do jednoho kompaktního zařízení.
- Nabízí velmi dobrý poměr mezi pořizovací cenou a užitnou hodnotou.
- Využívá moderní technologie běžně používané v oblasti neinvazivní estetické péče.
- Umožňuje aplikaci multipolární radiofrekvence pro povrchovou stimulaci pleti.
- Obsahuje technologii formování postavy pomocí světelné energie.
- Hlavičky jsou vyrobeny z odolných materiálů, jako je kov, nerezová ocel a tvrzený plast.
- Dostatečně dlouhé kabely aplikačních hlavic zajišťují komfortní manipulaci při používání.
- Možnost plynulého nastavení výkonu podle individuálních potřeb uživatele.
- Přehledné dotykové ovládání s podsvícenými tlačítky.
- Moderní a kompaktní provedení hlavní ovládací jednotky.
- Konstrukce přístroje je navržena s důrazem na dlouhou životnost.
- Součástí je spotřební materiál pro vakuovou drenáž (vyměnitelné filtrační tampónky).
- Vysoká variabilita použití díky více typům aplikačních hlavic.
- Při použití radiofrekvence a ultrazvuku se používá běžně dostupný vodivý gel (sonogel).
- Celý set je uložen v odolném kovovém kufříku pro snadné přenášení.

TECHNICKÉ PARAMETRY


- Frekvence ultrazvuku: 80Khz
- Frekvence radiofrekvence: 5Mhz
- Dávkování energie radiofrekvence: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.
- Dávkování EMS pulzů: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.
- Masážní programy EMS pulzů: 4
- Barvy fotonové terapie v režimu elektroforézy: červená, zelená, modrá, oranžová, žlutá, fialová, tyrkysová
- Vlnová délka červeného světla: 650nm
- Rozsah síly podtlaku vakuového sání: 0 až 250Kpa
- Rozměry: 50x40x30cm
- Hmotnost: 30kg

OBSAH BALENÍ

- 1x Hlavní jednotka BeautyRelax BR-3100
- 1x Hlavičce s radiofrekvencí a červeným světlem – 3 aplikační kolíčky
- 1x Hlavičce s radiofrekvencí a červeným světlem – 4 aplikační kolíčky
- 1x Hlavičce s radiofrekvencí a červeným světlem – 6 aplikačních kolíčků
- 1x Hlavičce s elektroforézou a barevným světlem fotonové terapie
- 1x Hlavičce s tepelnou terapií – působení chladu
- 1x Hlavičce s ultrazvukovou kavitací
- 6x Aplikátor s červeným světlem
- 1x Hlavičce s podtlakovou drenáží, radiofrekvencí a červeným světlem – malá velikost
- 1x Hlavičce s podtlakovou drenáží, radiofrekvencí a červeným světlem – střední velikost
- 1x Hlavičce s podtlakovou drenáží, radiofrekvencí a červeným světlem – velká velikost
- 1x Hlavičce s funkcí robotické maderoterapie
- 1x Hlavičce s funkcí vysokofrekvenční oscilace
- 2x Hlavičce pro masáž EMS pulzy
- 1x Kovový kufřík
- 1x Sada filtračních tampónků pro vakuovou hlavičci
- 3x Filtrační kazeta pro vakuové hlavičce
- 1x Sonogel 250ml
- 1x Napájecí kabel 220V
- 1x Sada stahovacích pásek na hlavičce s červeným světlem
- 1x Ochranné textilní brýle
- 1x Návod k obsluze

URČENO PRO VŠECHNY TYPY POSTAV

Používání přístroje BeautyRelax je vhodné pro všechny typy postav. Pro muže i ženy. Ať je predispozice většího ukládání tuku na jakékoliv partii. Výjimku tvoří osoby, na které se vztahuje některý ze stavů uvedených v soupisu kontraindikací.

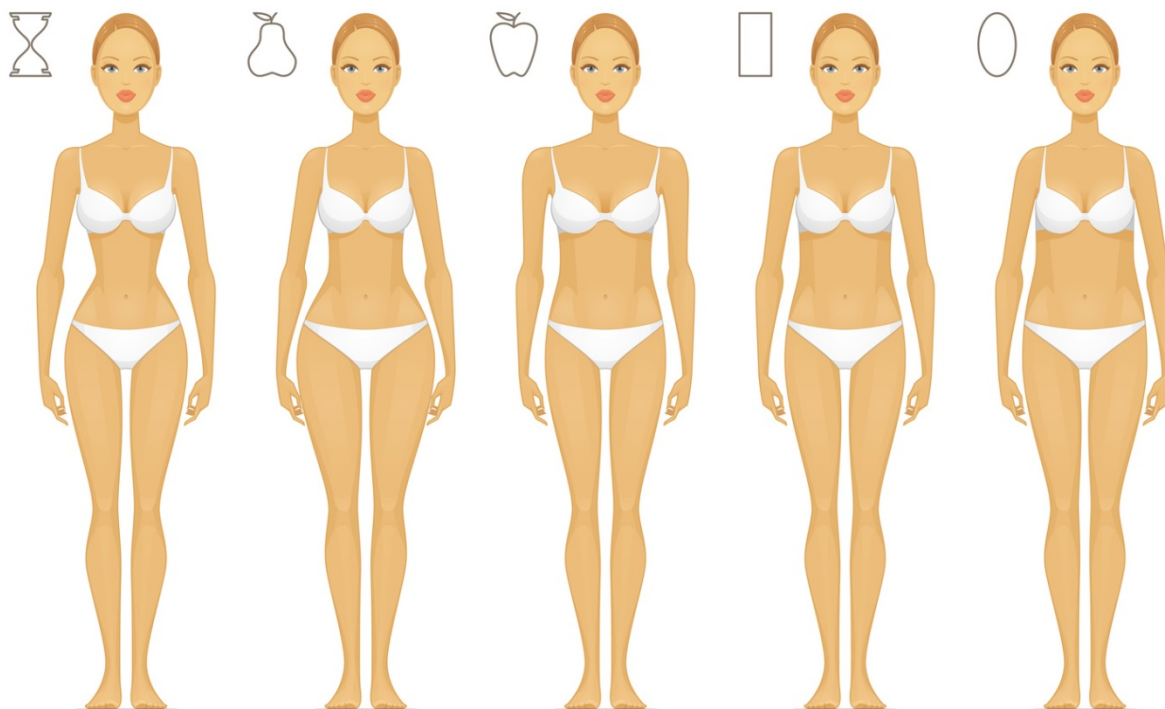

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o Vznik vrásek je přirozenou součástí procesu stárnutí pokožky. S přibývajícím věkem dochází k postupné ztrátě elasticity pleti a ke zpomalení buněčné obnovy. Tyto změny vedou ke snížení přirozené produkce kolagenu, který je klíčový pro pevnost a pružnost pokožky. V důsledku těchto procesů se na povrchu pleti objevují rýhy, které se postupně prohlubují a mohou zasahovat až do vrstvy dermis, tedy podpůrné vrstvy kůže.



Výsledkem je pleť s viditelnějšími a hlubšími vráskami. Vrásky lze rozdělit do dvou základních skupin. Dynamické vrásky vznikají opakovaným stahováním obličejových svalů a obvykle se začínají objevovat přibližně kolem 35. roku života. Statické vrásky jsou důsledkem povolení hlubších vrstev kůže a snížené tvorby kolagenu a zpravidla se objevují kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti péče o vrásky lze rozdělit na invazivní a neinvazivní. Invazivní metody zahrnují chirurgické zákroky nebo injekční aplikace, při nichž dochází k narušení povrchu pokožky. Tyto postupy jsou spojeny s vyšší zátěží pro organismus a delší dobou rekonvalescence. Neinvazivní metody zahrnují používání kosmetických přípravků, jako jsou krémy, gely, oleje nebo séra, a také přístrojové aplikace využívající technologie určené k povrchové stimulaci pokožky. Tyto technologie se zaměřují na podporu přirozených procesů v pleti, zejména stimulaci kolagenních a elastických vláken. Mezi často využívané neinvazivní technologie patří radiofrekvence, která je oblíbená pro svůj příznivý poměr mezi šetrností a estetickým efektem při pravidelném používání.

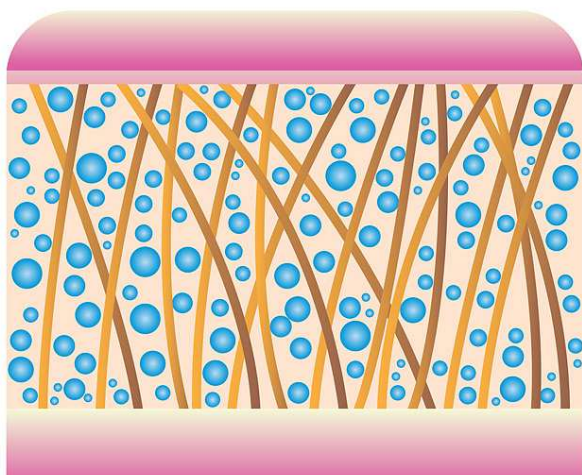

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

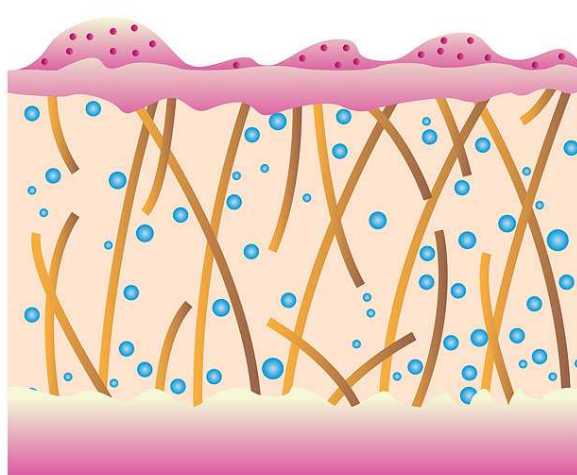

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Bodyface Multishape Madero Professional je profesionální estetický přístroj určený pro kosmetické a přístrojové procedury zaměřené na péči o vzhled pleti a těla. Je navržen pro podporu zlepšení vzhledu pokožky, modelaci kontur postavy a celkové zpevnění tkání v rámci estetických služeb. Zařízení je vybaveno několika aplikačními hlavicemi využívajícími kombinaci běžně používaných kosmetických technologií, jako jsou radiofrekvenční energie, elektrostimulace (EMS), ultrazvuková energie, světelná terapie (včetně červeného světla), vysokofrekvenční vibrace, působení chladu a další přístrojové metody využívané v oblasti kosmetiky. Součástí je také hlavice pro přístrojovou maderomasáž a oscilační masáž. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické a estetické využití. Nejedná se o zdravotnický prostředek a zařízení není určeno k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění. Výsledný efekt se může lišit v závislosti na individuálních dispozicích klienta a způsobu použití. Systém umožňuje nastavení intenzity jednotlivých funkcí dle potřeb provozu. Konstrukce přístroje je přizpůsobena profesionálnímu využití v komerčním prostředí s vyšší frekvencí použití. Aplikátory jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli pro zajištění mechanické odolnosti a dlouhodobé životnosti při správné údržbě.



ULTRAZVUKOVÉ VLNY

Aplikační hlavice generuje **ultrazvukové vlnění** určené pro povrchovou neinvazivní aplikaci. Působení probíhá lokálně v rozsahu nastavených provozních parametrů přístroje, bez narušení povrchu pokožky. Intenzitu aplikace lze regulovat prostřednictvím ovládací jednotky dle pokynů výrobce. Přístroj je určen výhradně pro **estetické a masážní použití**.



RADIOFREKVENCE

Aplikační hlavice generuje **radiofrekvenční energii** s definovaným výkonem a frekvencí. Působení probíhá **neinvazivně a povrchově**, v souladu s nastavenými provozními parametry přístroje. Intenzitu aplikace lze plynule regulovat prostřednictvím ovládací jednotky. Přístroj je určen pro **estetickou a masážní péči**, nikoli k léčebným účelům.



RADIOFREKVENCE VE TŘECH PROVEDENÍCH



ČERVENÉ SVĚTLO INTEGROVANÉ DO HLAVIC

- Podporuje přirozené procesy pokožky související s její pevností a pružností
- Přispívá ke zlepšení vzhledu a celkového tonusu pokožky
- Podporuje mikrocirkulaci v aplikované oblasti
- Přispívá ke sjednocení vzhledu pokožky
- Vlnová délka světla: 625 nm

VAKUOVÉ NASÁVÁNÍ S RADIOFREKVENCÍ

VAKUOVÁ MASÁŽ

- Využívá řízený podtlak k mechanické stimulaci povrchu pokožky
- Určena pro neinvazivní estetickou aplikaci na vybrané partie těla
- Intenzita podtlaku je nastavitelná podle zvoleného programu a komfortu uživatele



Aplikátor s vakuovým sáním a radiofrekvencí

- Pracuje v cyklickém režimu nasátí a uvolnění pokožky
- Aplikace probíhá plynulým nebo bodovým pohybem aplikační hlavice
- Podtlaková stimulace může být kombinována s působením radiofrekvence

Charakter aplikace


- Povrchová mechanická stimulace bez porušení integrity pokožky
- Přizpůsobitelné použití pro různé tělesné oblasti
- Určeno pro estetickou a masážní péči

ČERVENÉ SVĚTLO

Červené světlo s vlnovou délkou 650 nm je využíváno v oblasti estetické a masážní péče jako forma neinvazivní světelné stimulace. Použití této technologie vychází z dlouhodobého vývoje přístrojových metod, které jsou navrženy s důrazem na komfort uživatele a šetrnost aplikace. Světelná aplikace probíhá povrchově, bez mechanického zásahu a bez porušení integrity pokožky. Přístroj umožňuje nastavení délky a intenzity působení podle zvoleného programu a individuálních preferencí. V rámci estetických přístrojů se červené světlo řadí mezi technologie určené k pravidelnému používání, které nevyžaduje zvláštní režim před ani po aplikaci. Použití je koncipováno tak, aby bylo časově nenáročné a nenarušovalo běžný denní režim uživatele. Červené světlo může být využíváno samostatně nebo jako doplňková funkce v rámci kombinovaných přístrojových programů estetické péče.


ELEKTROFORÉZA - NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE

Kosmetické přípravky jsou do pokožky zapracovávány pomocí jemného působení mikroproudu v optimalizovaném frekvenčním rozsahu. Aplikační hlavice pracuje výhradně na povrchu pokožky a nenarušuje její integritu. Použitá technologie je určena pro komfortní kosmetické procedury bez mechanického porušení kůže. Procedura je navržena tak, aby byla šetrná a vhodná pro běžné kosmetické použití. Individuální vnímání komfortu se může lišit. Aplikační hlavice pro neinvazivní mezoterapii podporuje zapracování kosmetických roztoků přes povrch pokožky do jejích svrchních vrstev. Je vhodná pro aplikaci přípravků na tekuté bázi, například s obsahem vitamínů či rostlinných extraktů, které jsou běžně využívány v kosmetické péči. Součástí hlavice je integrovaný zásobník umožňující opakované naplnění přípravkem. Zařízení umožňuje plynulé nastavení intenzity dle potřeb obsluhy. Metoda je určena výhradně pro kosmetické účely. Nejedná se o zdravotnický prostředek ani o náhradu lékařských či dermatologických zákroků. Výsledný efekt závisí na individuálním stavu pokožky, použitém přípravku a pravidelnosti aplikace.

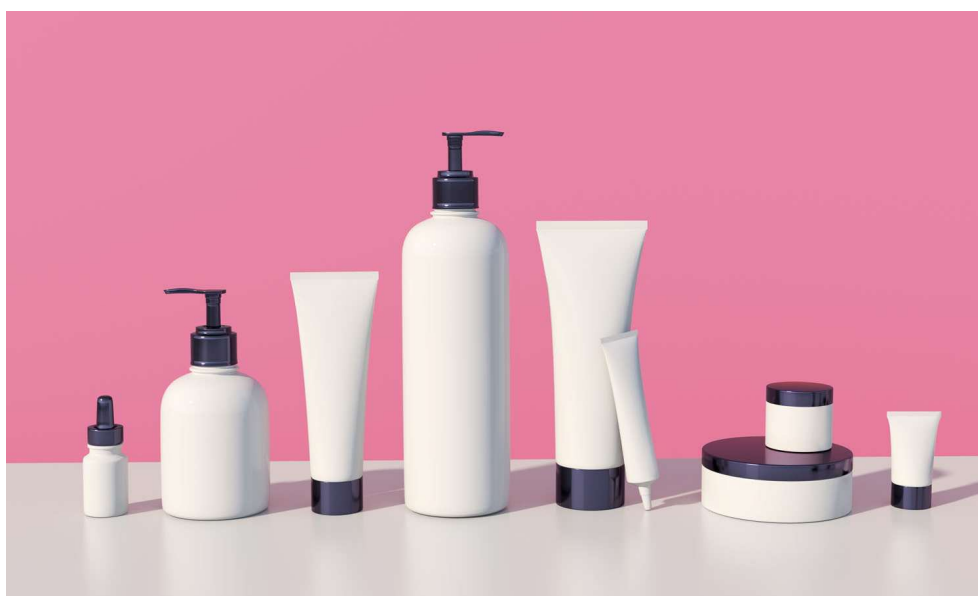

EMS

Technologie EMS (elektrická svalová stimulace) využívá nízkoúrovňové elektrické impulzy k vyvolání svalové kontrakce prostřednictvím elektrod umístěných na povrchu pokožky. Impulzy jsou přenášeny přes kůži do podkožních svalových struktur bez narušení kožní integrity. EMS je obecně známá technologie používaná v různých oblastech, například ve sportu, fyzioterapii či kosmetice. V rámci estetických přístrojů je určena výhradně pro kosmetické a neinvazivní využití.

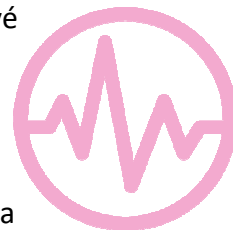

Základní princip fungování

Elektrody a impulzy

Zařízení je vybaveno hlavicemi, které se přikládají na pokožku v oblasti cílových svalových skupin. Přístroj generuje elektrické impulzy v nastavitelném rozsahu intenzity.

Svalová aktivace

Elektrické impulzy vyvolávají svalovou kontrakci obdobným způsobem, jako při běžné svalové aktivitě. V estetickém využití může přispívat k podpoře svalového tonusu a pevnějšího vzhledu aplikované oblasti.

Doplněk pohybové aktivity

EMS může být využíváno jako doplněk běžné pohybové aktivity v rámci estetických programů zaměřených na formování postavy. Nejedná se o náhradu aktivního pohybu ani zdravotní rehabilitace.

Kosmetické využití

V oblasti kosmetiky se EMS používá pro podporu pevnějšího vzhledu svalových partií těla nebo obličeje. Účinek je individuální a závisí na pravidelnosti aplikace, fyzické kondici a dalších faktorech.


Bezpečnostní upozornění

Při používání EMS je nutné dodržovat pokyny výrobce. Hlavice musí být používány pouze na doporučené partie těla. Zařízení není určeno k použití v oblasti srdce, hlavy ani intimních partií. Není určeno pro osoby s kardiostimulátorem, implantovanými elektronickými zařízeními, v těhotenství nebo při zdravotních omezeních bez konzultace s lékařem.

Tento systém je určen výhradně pro kosmetické účely. Nejedná se o zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění.

FOTONOVÉ SVĚTLO

Světlo je viditelná část elektromagnetického záření o různých vlnových délkách. Viditelné spektrum se pohybuje přibližně v rozmezí 380–780 nm (nanometrů). Lidské oko vnímá pouze část tohoto rozsahu. V kosmetických přístrojích se využívají specifické vlnové délky světla v rámci tzv. světelné (fotonové) terapie. Ta pracuje s energií světla ve formě fotonů, které působí na povrch pokožky a její svrchní vrstvy bez mechanického narušení kůže.

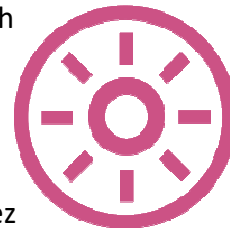

Různé vlnové délky světla jsou v kosmetické praxi spojovány s odlišným působením na vzhled pokožky. Konkrétní efekt je individuální a závisí na typu pleti, jejím aktuálním stavu a pravidelnosti aplikace.

Kosmetické působení světelné terapie

- Světelná energie působí neinvazivně na povrch pokožky.
- Různé barvy světla jsou v kosmetice využívány pro podporu přirozených procesů pokožky.
- Procedura je obecně vnímána jako komfortní a bez mechanického zásahu do kůže.
- Určeno výhradně pro estetické a kosmetické účely.

Zařízení není zdravotnickým prostředkem a není určeno k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění. Nejedná se o terapii zdravotních obtíží ani zánětlivých stavů.

Červené světlo v kosmetické aplikaci

Červené světlo je v kosmetické praxi běžně spojováno s podporou pevnějšího a svěžejšího vzhledu pokožky. V estetických procedurách je využíváno v rámci komplexní péče o pleť zaměřené na její celkový vzhled a tonus.

Červené světlo je integrováno do všech tří typů hlavic s radiofrekvenční funkcí, do hlavice s vakuovou drenáží a je rovněž součástí hlavice s funkcí elektroforézy.

Barevné spektrum světla

Hlavice s funkcí elektroforézy umožňuje využití více barevných variant světla:

- červená
- zelená
- modrá
- oranžová
- žlutá
- fialová
- tyrkysová

Jednotlivé barvy jsou v kosmetické praxi používány podle typu pleti a cíle estetické procedury.

Využití různých vlnových délek světla v kosmetické péči

ČERVENÉ SVĚTLO (630–700 NM)

- V kosmetické praxi je spojováno s podporou pevnějšího a pružnějšího vzhledu pokožky
- Přispívá k revitalizovanému vzhledu pleti
- Vhodné pro péči o zralou nebo unaveně působící pleť
- Podporuje svěží a sjednocený vzhled aplikované oblasti

MODRÉ SVĚTLO (400–470 NM)

- V kosmetice využíváno při péči o problematicky působící pleť
- Přispívá k čistšímu vzhledu pokožky
- Podporuje vyvážený vzhled pleti se sklony k nadměrnému maštění

ZELENÉ SVĚTLO (520–570 NM)

- Spojováno s podporou sjednoceného tónu pleti
- Přispívá ke klidnějšímu a vyrovnanějšímu vzhledu pokožky
- Vhodné pro pleť s nerovnoměrnou barevností

ŽLUTÉ SVĚTLO (570–590 NM)

- V kosmetické péči využíváno pro podporu svěžího vzhledu pleti
- Přispívá k optickému projasnění
- Vhodné pro citlivě působící pokožku

ORANŽOVÉ SVĚTLO (590–620 NM)

- Spojováno s podporou vitality a rozjasnění pleti
- Přispívá k celkově svěžímu vzhledu
- Vhodné jako součást revitalizačních kosmetických procedur

FIALOVÉ SVĚTLO (KOMBINACE MODRÉ A ČERVENÉ ČÁSTI SPEKTRA)

- Kombinuje vlastnosti červeného a modrého světla v rámci kosmetické aplikace
- Vhodné pro komplexní péči o pleť s různorodými potřebami
- Používá se při programech zaměřených na celkové zlepšení vzhledu pokožky

TYRKYSOVÉ SVĚTLO (490–520 NM)

- V kosmetice spojováno s podporou harmonického vzhledu pleti
- Přispívá k celkově vyváženému dojmu pokožky

Světelná terapie je určena výhradně pro kosmetické a estetické účely. Nejedná se o zdravotnický prostředek a zařízení není určeno k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění. Výsledný efekt je individuální a závisí na typu pleti, jejím stavu a pravidelnosti aplikace.

TEPELNÁ TERAPIE - PŮSOBENÍ CHLADU

Působení chladu v kosmetické péči

Chlazení pokožky je v oblasti kosmetiky a estetiky využíváno jako doplňková metoda pro zvýšení komfortu procedury a podporu svěžího vzhledu pleti. Účinek je individuální a závisí na typu pokožky a způsobu aplikace.

Optické zjemnění vzhledu pórů

Aplikace chladu může přispět k dočasnému stažení pokožky, což je často spojováno s jemnějším vzhledem pórů a svěžejším dojmem pleti.

Zklidnění pokožky

Chlad je v kosmetické praxi využíván pro zklidnění pokožky po intenzivnějších procedurách nebo při pocitu diskomfortu. Přispívá k subjektivnímu pocitu úlevy a komfortu.

Péče o oční okolí

Chladivé aplikace jsou běžně používány v oblasti očního okolí pro podporu svěžího vzhledu a redukci známek únavy. Výsledný efekt je dočasný a individuální.

Podpora mikrocirkulace

Střídání teplot nebo krátkodobé působení chladu je v kosmetice spojováno s podporou mikrocirkulace, což může přispět k celkově svěžejšímu vzhledu pokožky.

Komfort při přístrojových procedurách

Chladicí funkce může být součástí přístrojových kosmetických procedur (např. po exfoliačních nebo radiofrekvenčních aplikacích) za účelem zvýšení komfortu a subjektivního pocitu zklidnění pokožky.

Osvěžení pleti

Chladivé aplikace navozují pocit osvěžení a revitalizace, což je vyhledávané zejména při péči o unaveně působící pleť nebo v teplejším prostředí.


Kombinace s kosmetickými přípravky

Chlad může být využíván jako součást komplexní kosmetické péče v kombinaci s běžnými kosmetickými produkty určenými pro daný typ pleti.

Chladicí funkce je určena výhradně pro kosmetické a estetické účely. Nejedná se o zdravotnický prostředek ani o postup určený k léčbě či prevenci onemocnění. Výsledný efekt se může lišit v závislosti na individuálních dispozicích pokožky.

POPIS PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Vstup pro připojení hlavice s radiofrekvencí - 4 kolíčky
2. Vstup pro připojení hlavice s radiofrekvencí - 3 kolíčky
3. Vstup pro připojení hlavice s ultrazvukem
4. Vstup pro připojení hlavice s působením chladu
5. Vstup pro připojení aplikačních hlav s červeným světlem
6. Vstup pro připojení hlavice s radiofrekvencí - 6 kolíčků
7. Vstup pro připojení hlavice s funkcí EMS
8. Vstup pro připojení hlavice s elektroforézou
9. Vstup pro připojení vakuové hlavice velikost L (největší)
10. Vstup pro připojení vakuové hlavice velikost M (střední)
11. Vstup pro připojení vakuové hlavice velikost S (malá)
12. Hlavní tlačítko ON/OFF
13. Vstup pro zapojení napájecího kabelu
14. Otočné kolečko pro nastavení výkonu podtlaku aplikační hlavice s vakuovou masáží
15. Kazeta se vzduchovým filtrem

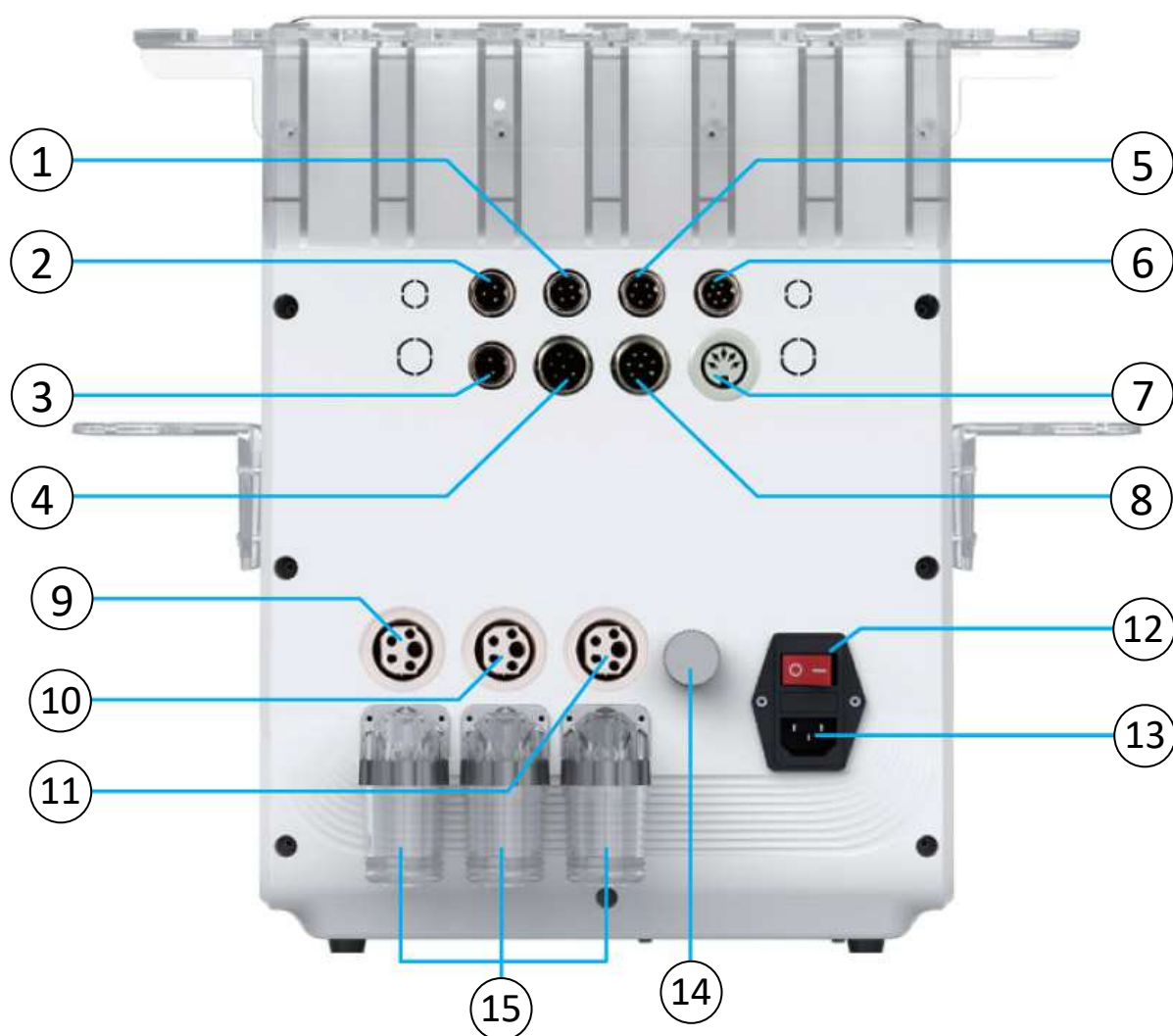



POPIS PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Dotykový displej
2. Dekorační pásek



POPIS PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE

1. *Hlavice s radiofrekvencí a červeným světlem - 3 kolíčky*
2. *Hlavice s radiofrekvencí a červeným světlem - 4 kolíčky*
3. *Hlavice s radiofrekvencí a červeným světlem - 6 kolíčků*
4. *Hlavice s funkcí EMS*
5. *Hlavice s ultrazvukem*
6. *Aplikační hlavice s červeným světlem*
7. *Vakuová hlavice velikost S (malá)*
8. *Vakuová hlavice velikost M (střední)*
9. *Vakuová hlavice velikost L (velká)*
10. *Hlavice s působením chladu*
11. *Hlavice s elektroforézou*

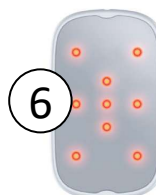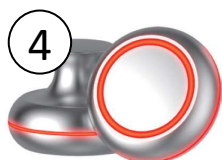

POPIS HLAVNÍ NABÍDKY PŘÍSTROJE

Úvodní animace



Volba jazyku




POPIS HLAVNÍ NABÍDKY PŘÍSTROJE

1. Tlačítko pro vstup do nabídky hlavic s červeným světlem
2. Tlačítko pro vstup do nabídky hlavic s vakuem
3. Tlačítko pro vstup do nabídky hlavic s ultrazvukem
4. Tlačítko pro vstup do nabídky hlavic s radiofrekvencí
5. Tlačítko pro vstup do nabídky hlavic s EMS
6. Tlačítko pro vstup do nabídky hlavic s působením chladu
7. Tlačítko pro vstup do nabídky hlavic s elektroforézou



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - RADIOFREKVENCE

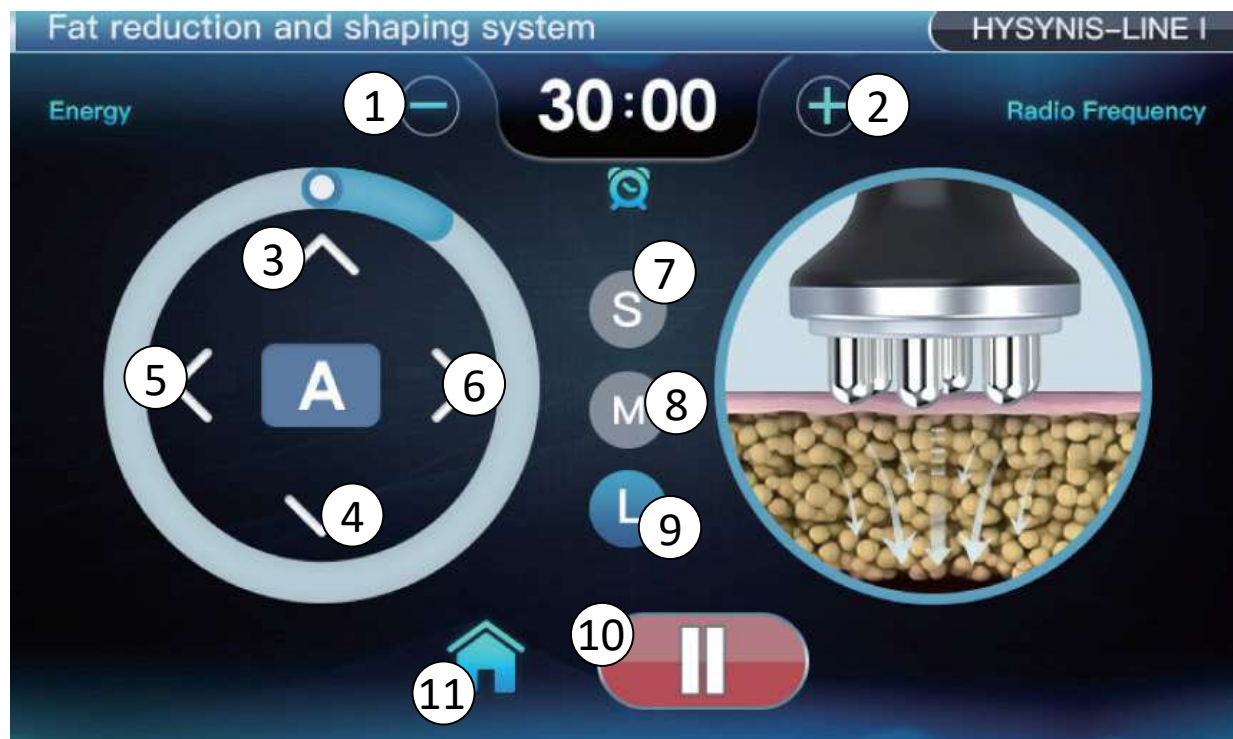

1. Tlačítko snížení **ČASU** aplikace.
2. Tlačítko zvýšení **ČASU** aplikace.
3. Tlačítko změna **MÓDU** působení radiofrekvence.
4. Tlačítko změna **MÓDU** působení radiofrekvence.
5. Tlačítko snížení **VÝKONU** působení radiofrekvence.
6. Tlačítko zvýšení **VÝKONU** působení radiofrekvence.
7. Volba typu aplikační hlavice - **velikost S** - varianta se 3 kolíčky.
8. Volba typu aplikační hlavice - **velikost M** - varianta se 4 kolíčky.
9. Volba typu aplikační hlavice - **velikost L** - varianta se 6 kolíčky.
10. Tlačítko **START/STOP**.
11. Tlačítko **HOME** - návrat do hlavní nabídky.

Upozorňujeme, že plastový kryt aplikační hlavice může během běžného používání vlivem okolního prostředí (teplota, mednické působení, UV záření atd.) vizuálně změnit svůj vzhled. Může se objevit efekt připomínající "popraskání" povrchu. Tento jev je zcela běžný, není důvodem k reklamaci a nijak neovlivňuje samotnou činnost a výkon hlavice.

POUŽITÍ HLAVICE S RADIOFREKVENCÍ

1. V menu přístroje zvolte funkci radiofrekvence dle typu hlavice, kterou se rozhodnete použít. K dispozici jsou hlavice se třemi, čtyřmi a šesti aplikačními kolíčky. Zvolte typ hlavice podle velikosti partie těla, kterou se rozhodnete s aplikační hlavicí aplikovat. Hlavice se 3 kolíčky se aktivuje tlačítkem S **(7)**. Hlavice se 4 kolíčky se aktivuje tlačítkem M **(8)**. Hlavice se 6 kolíčky se aktivuje tlačítkem L **(9)**. Použití je vždy spojeno s vodivým gelem (klasický čirý indiferentní gel).
2. Pomocí tlačítek **(3)** a **(4)** si můžete nastavit MÓD působení radiofrekvence. K dispozici jsou 4 MÓDY - **A,B,C,D**. V každém módu se mění režim působení radiofrekvence. Obecně doporučujeme použít MÓD A pro kontinuální stálé působení radiofrekvence.
3. Pomocí tlačítek **(1)** a **(2)** si můžete nastavit čas aplikace. K dispozici je rozsah od **0** do **60** minut.
4. Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit výkon působení radiofrekvence. K dispozici je rozsah výkonu od **0** do **10**.
5. Pomocí tlačítka **(10)** můžete zapnout nebo vypnout funkci radiofrekvence.
6. Pomocí tlačítka **(11)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.












OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ULTRAZVUK

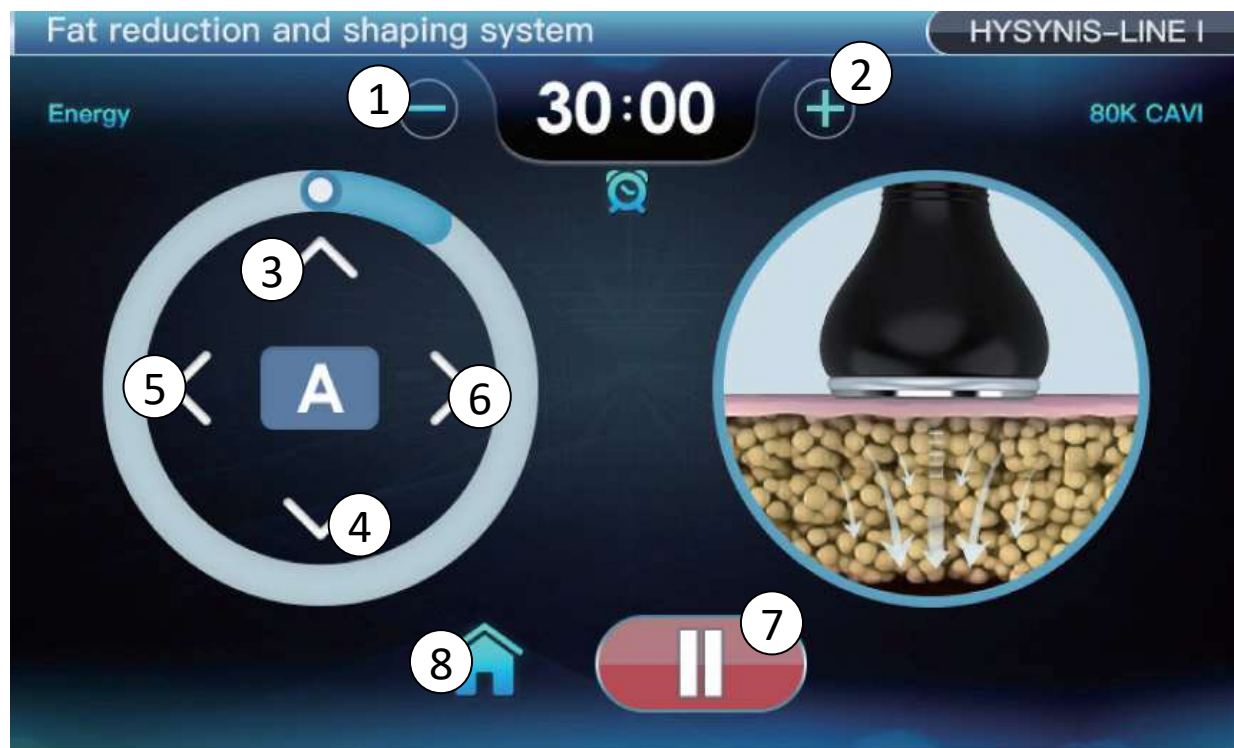

1. Tlačítko snížení **ČASU** aplikace.
2. Tlačítko zvýšení **ČASU** aplikace.
3. Tlačítko změna **MÓDU** působení ultrazvuku.
4. Tlačítko změna **MÓDU** působení ultrazvuku.
5. Tlačítko snížení **VÝKONU** působení ultrazvuku.
6. Tlačítko zvýšení **VÝKONU** působení ultrazvuku.
7. Tlačítko **START/STOP**.
8. Tlačítko **HOME** - návrat do hlavní nabídky.

POUŽITÍ HLAVICE S ULTRAZVUKEM

1. Pro použití zvolte aplikační hlavici s ultrazvukem.
2. Pomocí tlačítek **(3)** a **(4)** si můžete nastavit MÓD působení ultrazvuku. K dispozici jsou 4 MÓDY - **A,B,C,D**. V každém módu se mění režim působení ultrazvuku. Obecně doporučujeme pro použití MÓD A - kontinuální stálé působení ultrazvuku.
3. Pomocí tlačítek **(1)** a **(2)** si můžete nastavit čas aplikace. K dispozici je rozsah od **0** do **60** minut.
4. Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit výkon působení ultrazvukových vln. K dispozici je rozsah výkonu od **0** do **10**.
5. Pomocí tlačítka **(7)** můžete zapnout nebo vypnout funkci ultrazvuku.
6. Pomocí tlačítka **(8)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - VAKUOVÁ HLAVICE



1. Tlačítko snížení **ČASU** aplikace.
2. Tlačítko zvýšení **ČASU** aplikace.
3. Tlačítko změna **MÓDU** působení radiofrekvence.
4. Tlačítko změna **MÓDU** působení radiofrekvence.
5. Tlačítko snížení **VÝKONU** působení radiofrekvence.
6. Tlačítko zvýšení **VÝKONU** působení radiofrekvence.
7. Volba typu aplikační hlavice - **velikost S** (malá).
8. Volba typu aplikační hlavice - **velikost M** (střední).
9. Volba typu aplikační hlavice - **velikost L** (velká).
10. Nastavení délky fáze **nasávání vakua**
11. Nastavení délky fáze **pozastavení tvorby vakua**
12. Tlačítko **START/STOP**.
13. Tlačítko **HOME** - návrat do hlavní nabídky.

POUŽITÍ HLAVICE S VAKUOVOU MASÁŽÍ

- 1.** Pro použití zvolte aplikační hlavici s vakuovou masáží. K dispozici jsou dvě velikosti - S (malá), M (střední) a L (velká). Výběr hlavice si můžete volit na displeji pomocí tlačítek **S(7)**, **M(8)** a **L(9)**.
- 2.** Pomocí tlačítek **(3)** a **(4)** si můžete nastavit MÓD působení radiofrekvence. K dispozici jsou 4 MÓDY - **A,B,C,D**. V každém módu se mění režim působení radiofrekvence. Obecně doporučujeme pro použití MÓD A - kontinuální stálé působení radiofrekvence. Použití je vždy spojeno s vodivým gelem (klasický čirý indifferenční gel).
- 3.** Pomocí tlačítek **(1)** a **(2)** si můžete nastavit čas aplikace. K dispozici je rozsah od **0** do **60** minut.
- 4.** Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit výkon působení radiofrekvence. K dispozici je rozsah výkonu od **0** do **10**.
- 5.** Pomocí tlačítek se šipkami **(10)** si můžete měnit délku nasávání vakuové hlavice. K dispozici je rozsah od **0** do **10**. Hodnoty jsou uvedeny v sekundách.
- 6.** Pomocí tlačítek se šipkami **(11)** si můžete měnit čas, kdy je tvorba vakua pozastaveno. K dispozici je rozsah nastavení od **0** do **10**. Hodnoty jsou uvedeny v sekundách.
- 7.** Pomocí otočného kolečka na zadní straně přístroje si můžete měnit výkon působení vakua. Nastavte si takový, který vám nejvíce vyhovuje pro danou partii těla.
- 8.** Pomocí tlačítka **(12)** můžete zapnout nebo vypnout funkci vakuové hlavice.
- 9.** Pomocí tlačítka **(13)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.

Upozorňujeme, že plastový kryt aplikační hlavice může během běžného používání vlivem okolního prostředí (teplota, mednické působení, UV záření atd.) vizuálně změnit svůj vzhled. Může se objevit efekt připomínající "popraskání" povrchu. Tento jev je zcela běžný, není důvodem k reklamaci a nijak neovlivňuje samotnou činnost a výkon hlavice.





OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ČERVENÉ SVĚTLO



1. Tlačítko snížení **ČASU** aplikace.
2. Tlačítko zvýšení **ČASU** aplikace.
3. Tlačítko změna **MÓDU** působení červeného světla.
4. Tlačítko změna **MÓDU** působení červeného světla.
5. Tlačítko snížení **VÝKONU** působení červeného světla.
6. Tlačítko zvýšení **VÝKONU** působení červeného světla.
7. Tlačítko **START/STOP**.
8. Tlačítko **HOME** - návrat do hlavní nabídky.



POUŽITÍ HLAVIC S ČERVENÝM SVĚTLEM

- 1.** Pro použití zvolte funkci červeného světla prostřednictvím 6 aplikačních hlavic.
- 2.** Hlavice zafixujte na vybrané části těla pomocí stahovacích pásků, které jsou součástí balení.
- 3.** Pomocí tlačítek **(3)** a **(4)** si můžete nastavit MÓD působení červeného světla. K dispozici jsou 4 MÓDY - **A,B,C,D**. V každém módu se mění režim působení červeného světla. Obecně doporučujeme pro použití MÓD A - kontinuální stálé působení červeného světla.
- 4.** Pomocí tlačítek **(1)** a **(2)** si můžete nastavit čas aplikace. K dispozici je rozsah od **0** do **60** minut.
- 5.** Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit výkon působení červeného světla. K dispozici je rozsah nastavení výkonu od **0** do **10**.
- 6.** Pomocí tlačítka **(7)** můžete zapnout nebo vypnout funkci červeného světla.
- 7.** Pomocí tlačítka **(8)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - PŮSOBENÍ CHLADU




1. Tlačítko snížení **ČASU** aplikace.
2. Tlačítko zvýšení **ČASU** aplikace.
3. Tlačítko snížení **VÝKONU** působení chladu.
4. Tlačítko zvýšení **VÝKONU** působení chladu.
5. Tlačítko **START/STOP**.
6. Tlačítko **HOME** - návrat do hlavní nabídky.

POUŽITÍ HLAVICE S PŮSOBENÍM CHLADU


1. Pro použití zvolte aplikační hlavici s funkcí působení chladu.
2. V rámci působení funkce chladu pracuje pouze režim **A**.
3. Pomocí tlačítek **(1)** a **(2)** si můžete nastavit čas aplikace. K dispozici je rozsah od **0** do **60** minut.
4. Pomocí tlačítek **(3)** a **(4)** si můžete nastavit výkon působení chladu. K dispozici je rozsah nastavení výkonu od **0** do **10**.
5. Pomocí tlačítka **(5)** můžete zapnout nebo vypnout funkci působení chladu.
6. Pomocí tlačítka **(6)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ELEKTROFORÉZA

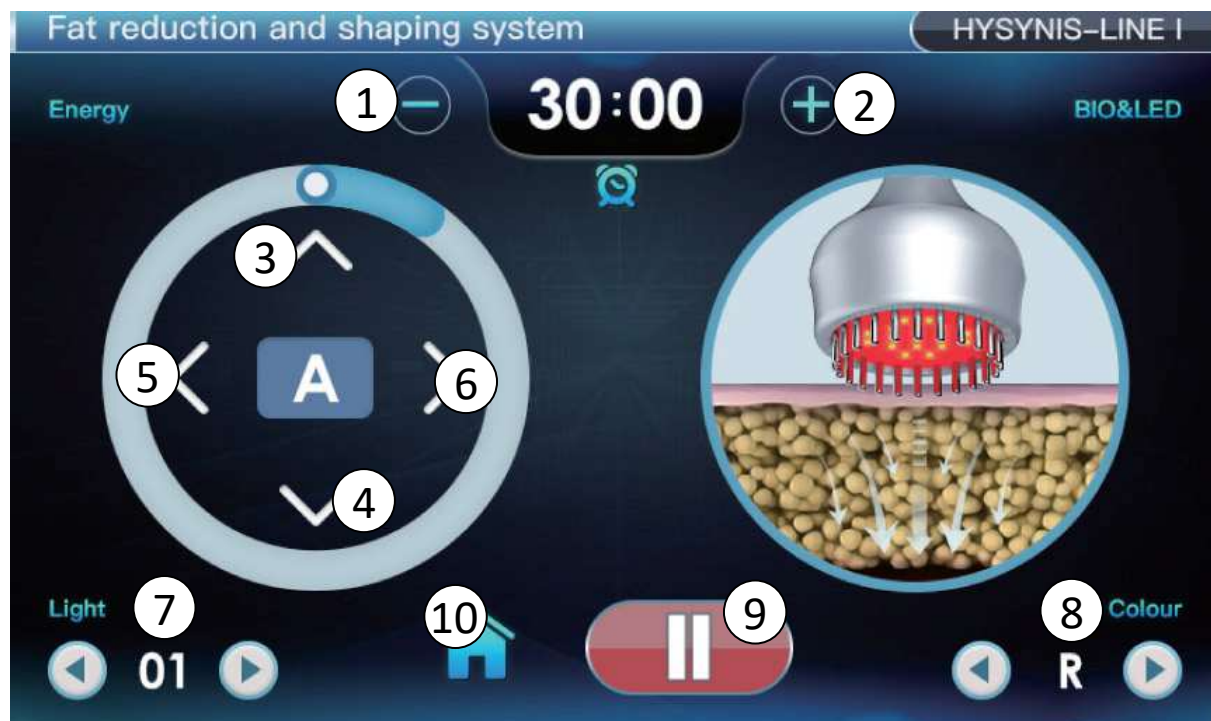

1. Tlačítko snížení **ČASU** aplikace.
2. Tlačítko zvýšení **ČASU** aplikace.
3. Tlačítko změna **MÓDU** působení elektroforézy.
4. Tlačítko změna **MÓDU** působení elektroforézy.
5. Tlačítko snížení **VÝKONU** působení elektroforézy.
6. Tlačítko zvýšení **VÝKONU** působení elektroforézy.
7. Tlačítko nastavení intenzity působení světelné terapie.
8. Tlačítko změna barvy světelné terapie.
9. Tlačítko **START/STOP**.
10. Tlačítko **HOME** - návrat do hlavní nabídky.

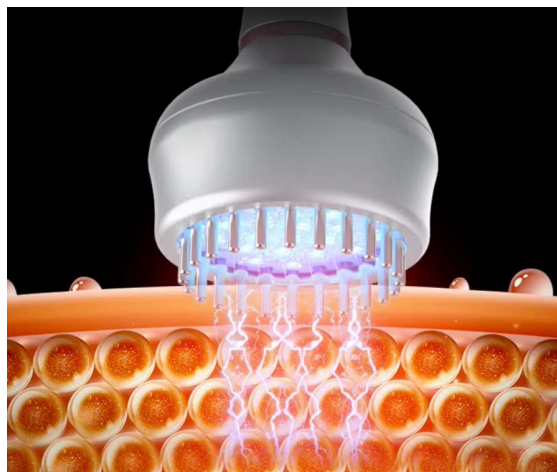


POUŽITÍ HLAVICE S FUNKCÍ ELEKTROFORÉZY

1. Pro použití zvolte aplikační hlavici s funkcí elektroforézy.
2. S tímto typem hlavice můžete pracovat jak na tváři, tak v místě růstu vlasů, ale i na těle. Vždy je třeba přizpůsobit intenzitu podle místa použití. Každá partie může mít různou citlivost.
3. Pomocí tlačítek **(3)** a **(4)** si můžete nastavit MÓD působení elektroforézy. K dispozici jsou 4 MÓDY - **A,B,C,D**. V každém módu se mění režim působení elektroforézy. Obecně doporučujeme pro použití MÓD A - kontinuální stálé působení elektroforézy.
4. Pomocí tlačítek **(1)** a **(2)** si můžete nastavit čas aplikace. K dispozici je rozsah od **0** do **60** minut.
5. Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit výkon působení elektroforézy. K dispozici je rozsah výkonu od **0** do **10**.
6. Pomocí tlačítek se šipkami **(8)** si můžete měnit barvu světla fotonové terapie. K dispozici je výběr barev: červená, zelená, modrá, oranžová, žlutá, fialová, tyrkysová.
7. Pomocí tlačítek se šipkami **(7)** si můžete měnit intenzitu působení světla fotonové terapie. K dispozici je rozsah nastavení výkonu svítivosti od **0** do **10**.
8. Pomocí tlačítka **(9)** můžete zapnout nebo vypnout funkci působení elektroforézy.
9. Pomocí tlačítka **(10)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - EMS

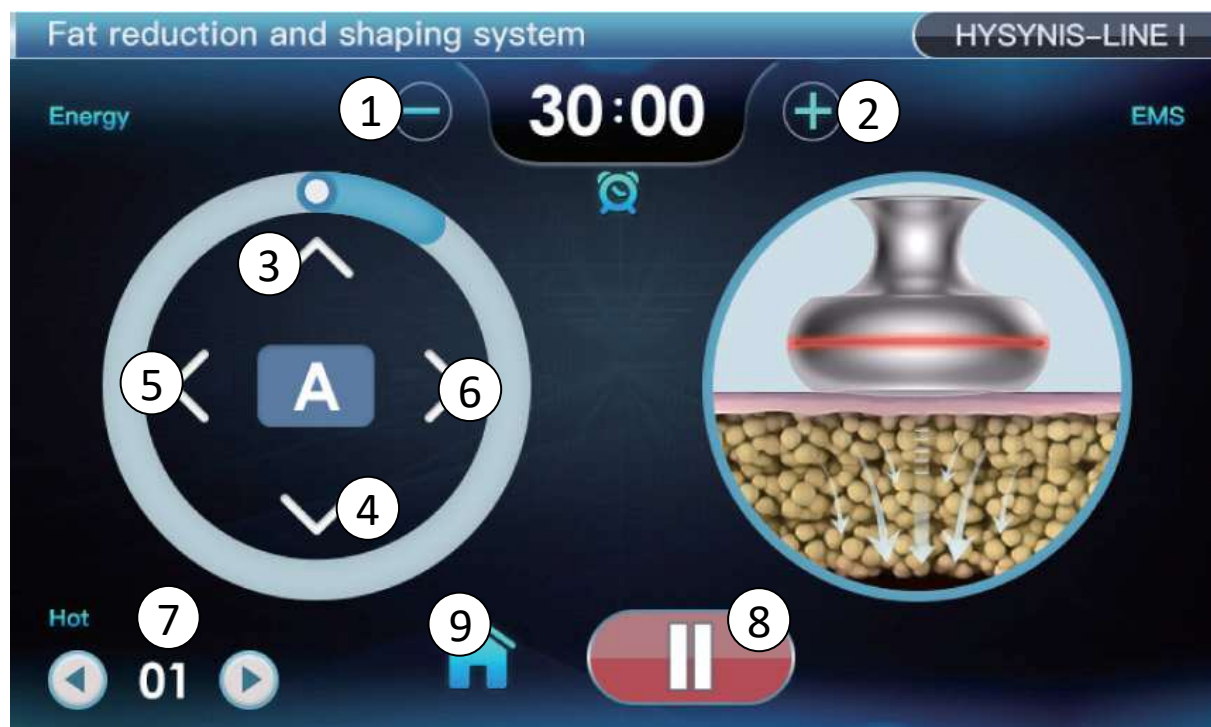

1. Tlačítko snížení **ČASU** aplikace.
2. Tlačítko zvýšení **ČASU** aplikace.
3. Tlačítko změna **MÓDU** působení funkce **EMS**.
4. Tlačítko změna **MÓDU** působení funkce **EMS**.
5. Tlačítko snížení **VÝKONU** působení funkce **EMS**.
6. Tlačítko zvýšení **VÝKONU** působení **FUNKCE EMS**.
7. Tlačítko nastavení intenzity působení tepla.
8. Tlačítko **START/STOP**.
9. Tlačítko **HOME** - návrat do hlavní nabídky.

POUŽITÍ HLAVICE S FUNKCÍ EMS PULZŮ

1. Pro použití zvolte aplikační funkci s EMS pulzy. Na tělo se přenáší pomocí dvou aplikačních hlavice. Aby technologie mohla na pleti pracovat, je vždy třeba mít **obě hlavice v kontaktu s pletí současně**. Použití je vždy spojeno s vodivým gelem (klasický čirý indiferentní gel). Použití v **oblasti hlavy (tváře), krku nebo dekoltu je zakázáno**.
2. Pomocí tlačítek **(3)** a **(4)** si můžete nastavit MÓD působení EMS pulzů. K dispozici jsou 4 MÓDY - **A,B,C,D**. V každém módu se mění režim působení EMS pulzů. Obecně doporučujeme pro použití MÓD A - kontinuální stálé působení EMS pulzů.
3. Pomocí tlačítek **(1)** a **(2)** si můžete nastavit čas aplikace. K dispozici je rozsah od **0** do **60** minut.
4. Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit výkon působení EMS pulzů. K dispozici je rozsah výkonu od **0** do **10**.
5. Pomocí tlačítek se šipkami **(7)** si můžete měnit intenzitu působení tepla. Působení nastaveného tepla se projeví po určité chvíli.
6. Pomocí tlačítka **(8)** můžete zapnout nebo vypnout funkci působení EMS pulzů.
7. Pomocí tlačítka **(9)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.



INSTALACE PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE

Připojte k hlavní jednotce všechny aplikační hlavice. Vstupy se nachází na zadní straně hlavní jednotky. **Vždy dbejte na to, aby byl konektor správně zapojen do zdířky ve správném úhlu a nadoraz. Konektor má přesně daný úhel, pod kterým ho lze zapojit do zdířky.** Úhel je dán vykrojenou plochou, která přesně zapadne. Instalaci aplikačních hlavíc provádějte při vypnutém přístroji. Konektor aplikační hlavice radiofrekvence, ultrazvukových vln, elektroforézy a červeného světla mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.

INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁKY NA HLAVICE

Součástí balení je sada podstavců. Slouží pro umístění aplikačních hlavíc. Pomocí šroubků upevněte malé boční podstavce z každé strany a velký stojan na zadní straně přístroje. Použijte křížový šroubovák. **Šroubky neutahujte příliš velkou silou. Mohlo by dojít k prasknutí podstavce.** Může se stát, že bude třeba šroubky po nějakém čase znovu dotáhnout. **Hlavní jednotku přístroje umístěte vždy na rovnou plochu.**

Výsledná podoba zkompletované sady



INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ FILTR

Na zadní straně přístroje se nachází sada 3 kusů vzduchových kazet, kde jsou umístěny vzduchové filtry bílé barvy. Bez instalace kazet se vzduchovým filtrem do přístroje nebude funkce vakuové drenáže fungovat. Filtr je zodpovědný za to, aby se do vzduchového systému napojeného k čerpadlu nedostaly žádné nečistoty. Filtr je bezúdržbový. Není třeba ho měnit. Jednou za dlouhý čas můžete provést kontrolu filtru. Pokud budete potřebovat náhradní vzduchové filtry, kontaktujte prosím prodejce. Vždy dejte pozor, aby se vám při vysunutí spodní části celý plastový blok neodlomil. Ideálně vždy druhou rukou horní část celého bloku přidržte.




INSTALACE PŘÍSTROJE - FILTRAČNÍ TAMPÓNEK

Hlavice s vakuovým sáním je vybavena filtračním tampónkem. Vytváří nezbytnou ochranu před vniknutím nečistot nebo částic kontaktního gelu dovnitř podtlakového systému. Doporučujeme stav a kondici filtru pravidelně kontrolovat. Pokud je výrazně zasažen vlhkostí, je špinavý nebo je pokrčený, což je v rozporu s jeho funkcí, vyměňte jej za nový. Několik kusů filtračních tampónků je součástí balení. Pokud budete potřebovat nové balení, kontaktujte prosím prodejce/distributora.

NASTAVENÍ INTENZITY ULTRAZVUKU

Každý uživatel může vnímat působení přístroje odlišně v závislosti na konkrétní části těla a zvoleném nastavení. Z tohoto důvodu je přístroj vybaven možností plynulého nastavení intenzity, aby bylo možné použití přizpůsobit individuálním preferencím a komfortu. Intenzitu ultrazvuku lze na ovládacím panelu nastavit v několika úrovních. Doporučuje se vždy začínat na nejnižší hodnotě a výkon zvyšovat postupně. Nastavení by mělo odpovídat subjektivnímu vnímání uživatele a nemělo by vyvolávat nepříjemné pocity. Neexistuje univerzální hodnota intenzity vhodná pro všechny situace. Vyšší nastavení výkonu neznamená vyšší účinnost ani rychlejší dosažení výsledků. Použití přístroje je určeno k postupné a kontrolované aplikaci v souladu s doporučenými časovými intervaly.

Při používání přístroje je vhodné respektovat doporučené přestávky mezi jednotlivými aplikacemi a řídit se pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Přístroj je navržen pro neinvazivní estetické použití s důrazem na bezpečnost a uživatelský komfort.

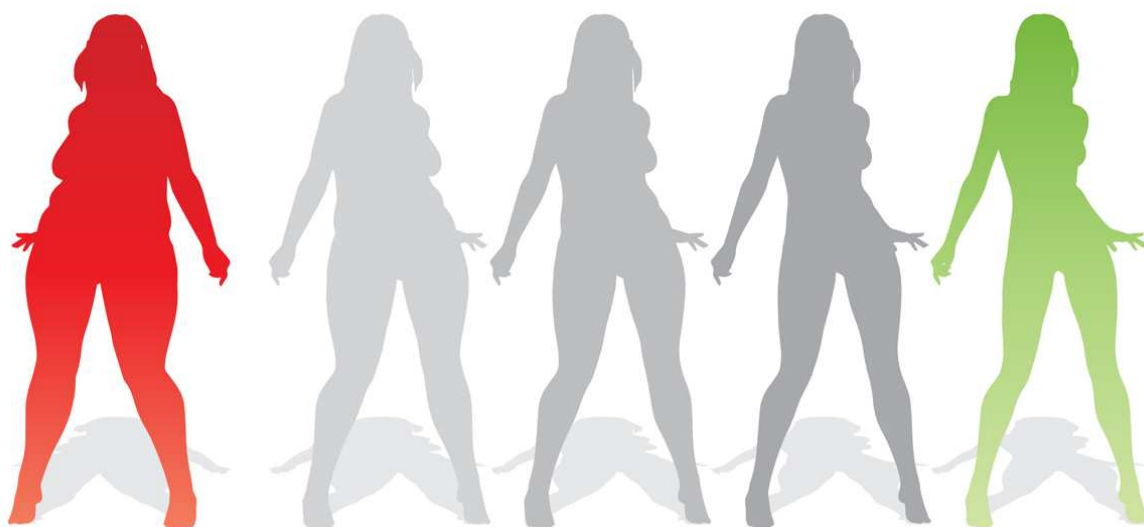

ČAS APLIKACE - ULTRAZVUK

Délka aplikace ultrazvukem by neměla překročit 20 minut na jednu partii. U párových částí těla se doporučuje rozdělit čas rovnoměrně mezi obě strany. V rámci jednoho dne je vhodné aplikovat přístroj maximálně na dvě oblasti. Opakované použití na stejné partii se doporučuje nejdříve po uplynutí 7 dní. Mezi jednotlivými aplikacemi je vhodné ponechat časový odstup. Přestávky mezi použitím jsou součástí doporučeného režimu a slouží k zachování komfortu a bezpečnosti při používání přístroje. Použití přístroje by mělo vždy probíhat v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ HLAVICE ULTRAZVUKEM

Při použití hlavice s technologií ultrazvuku je nezbytné aplikovat na povrch pleti hostéčné množství sonogelu. **Hlavice se nesmí používat na suchou pokožku.** V průběhu použití sonogel z pleti postupně vysychá. **Průběžně tedy gel doplňujte**, aby hlavice stále po gelu klouzala.

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK



UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - ULTRAZVUK

PAŽE




Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na rukou. Aplikační hlavici přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně aplikujte vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujte se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.



Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem aplikujte postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.



Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživém pohybu. Takto aplikujte celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

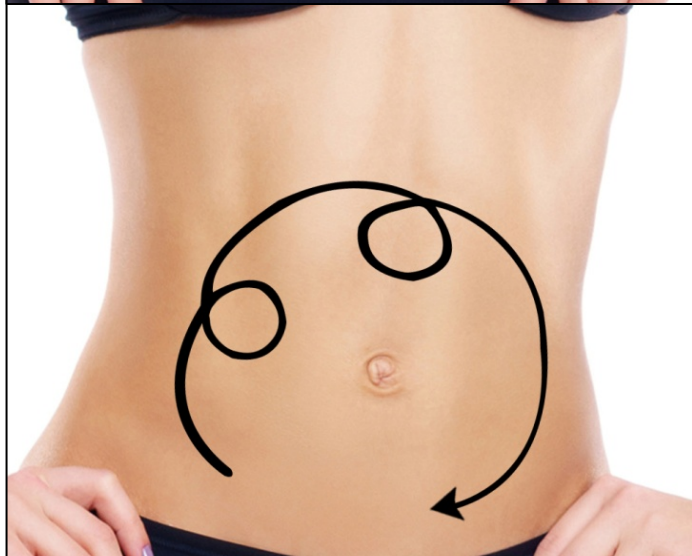

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto aplikujte celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.



Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.




Aplikační hlavici se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.



Aplikační hlavici se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.



Aplikační hlavici se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto aplikovat celou oblast hýždí.

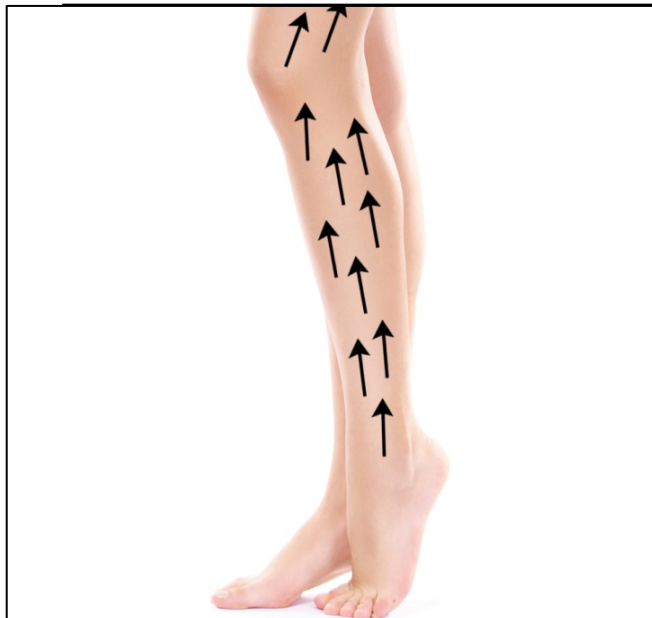

Aplikační hlavicí se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.



Aplikační hlavicí se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.



Aplikační hlavicí se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete aplikovat přední i zadní část končetiny.

DÉLKA A FREKVENCE POUŽITÍ HLAVIC

Použití červeného světla s vlnovou délkou 650 nm je určeno pro povrchovou, neinvazivní estetickou aplikaci. Mezi jednotlivými použitími se doporučuje ponechat časový odstup, aby bylo zajištěno komfortní a bezpečné používání přístroje.

- V průběhu jednoho dne je doporučeno zaměřit se vždy pouze na jednu vybranou partii těla.
- U větších oblastí lze aplikaci rozdělit do více sousedních úseků v rámci jedné partie.
- Celková doba použití na jednu partii by neměla v jednom dni překročit 30 až 40 minut.
- Opakované použití na stejné partii se doporučuje nejdříve po několika dnech, v souladu s doporučeným režimem používání.
- Použití lze zařadit do pravidelného režimu estetické péče dle individuálních preferencí uživatele.

Základní zásady použití:



1. Doba aplikace v jednom dni by neměla přesáhnout doporučený časový limit.
2. Mezi aplikacemi na stejnou oblast je vhodné dodržovat časový odstup.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ČERVENÉHO SVĚTLA

1. Aplikačními hlavicemi nesvítit do místnosti. Funkci aktivovat v okamžiku, kdy jsou hlavice na pleti.
2. Po ukončení aplikace může být pokožka v místě použití dočasně zarudlá. Tento jev je běžný a obvykle během krátké doby odezní.
3. Aplikace červeného světla je navržena jako jednoduchá, povrchová a neinvazivní součást estetické péče.
4. Dodržujte bezpečnostní pokyny týkající se ochrany zraku. Světelný zdroj nikdy neaktivujte mimo kontakt aplikačních hlavic s pokožkou a vyvarujte se přímého pohledu do světla.
5. Pro první použití se doporučuje zvolit jednu vybranou oblast a řídit se doporučenou délkou a frekvencí aplikace uvedenou v návodu.
6. Výsledky použití se mohou lišit v závislosti na individuálních faktorech a způsobu používání přístroje.
7. Použití přístroje je určeno jako součást běžné estetické péče a nevyžaduje zvláštní režim před ani po aplikaci.
8. Delší nebo častější používání, než je uvedeno v návodu, nezvyšuje účinnost aplikace a nedoporučuje se.
9. Po použití může uživatel pociťovat dočasnou únavu nebo změny v komfortu, které jsou individuální a obvykle přechodné.

PŘÍKLADY POUŽITÍ HLAVIC S ČERVENÝM SVĚTLEM

Příklady aplikace hlavice s červeným světlem. Obrázky jsou ilustrační při použití s jiným modelem. Mají informativní charakter. Hlavní význam je znázornění různých možností použití. Slouží pro vaši inspiraci. Vy si samozřejmě můžete upevnit hlavice na vybrané partii těla podle svého.

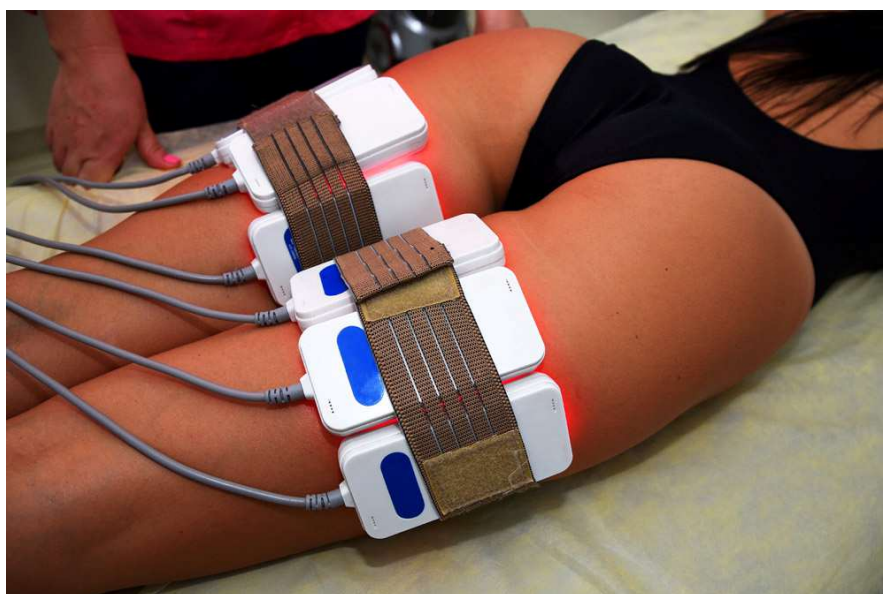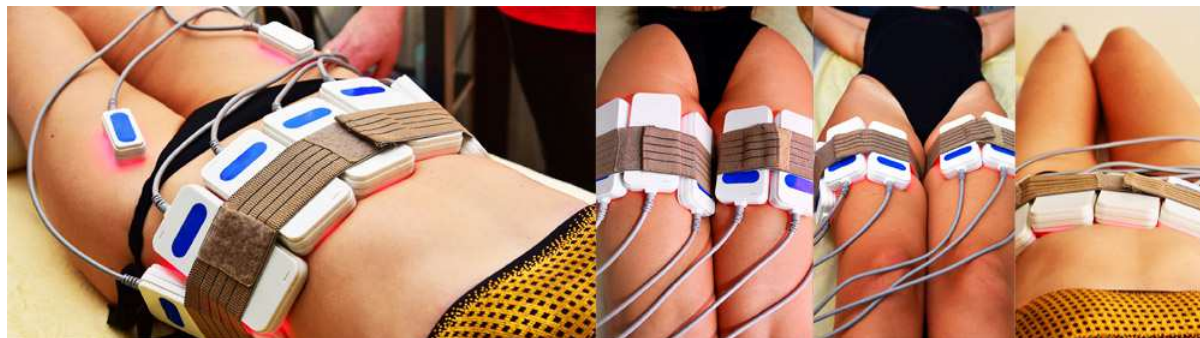

PŘÍKLADY POUŽITÍ HLAVIC S ČERVENÝM SVĚTLEM



UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - VAKUOVÉ SÁNÍ

pohybová masáž

Aplikační hlavici se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí kontaktního gelu nebo olejíčku. **Nikdy nepoužívejte masáž přístrojem na sucho, ale v kombinaci s kontaktním sonogelem nebo olejíčkem.** Při pohybové masáži je důležité nastavit **sílu nasávání na co nejmenší úroveň.** Zároveň nastavit co **nejdelší interval uvolnění vakua.** Pokud přístroj nasaje část těla až příliš silně, aplikátorem už nebude možné pohnout.




bodová masáž

Bodová masáž spočívá v aplikaci konkrétní tělesné partie po částech – viz. obrázek. Přístroj zapnete a přiložíte aplikátor k pleti. Po nastavení všech parametrů spustí přístroj funkci nasávání v síle a délce, kterou si sami zvolíte. Při bodové masáži může po aplikaci na pleť zarudnout. Pokud si nastavíte nasávání příliš silné, mohou se na pleti objevit i mírné otoky až modřiny, které však v průběhu několika dní zcela zmizí. Vždy začínejte na nižší síle působení vakua a postupně si přidávejte dle vašeho pocitu. **Rozhodně hned nezačínajte na nejvyšších hodnotách!**



Při aplikaci ostatních částí těla postupujte podle následující grafické vizualizace. Rozdíl mezi pohybovou a bodovou masáží spočívá nejen v odlišné technice, ale v účinku působení na tělo. **Pohybová masáž** přispívá zejména ke zlepšení činnosti lymfy. Tělo získá lepší odvádět nadbytečnou vodu z končetin. Při **bodové masáži** podpoříte lokální krevní oběh, což přispívá k celkové efektivnější látkové výměně a odvodu škodlivin. Ideální na použití partií s výskytem příznaků celulitidy (pomerančové kůže).

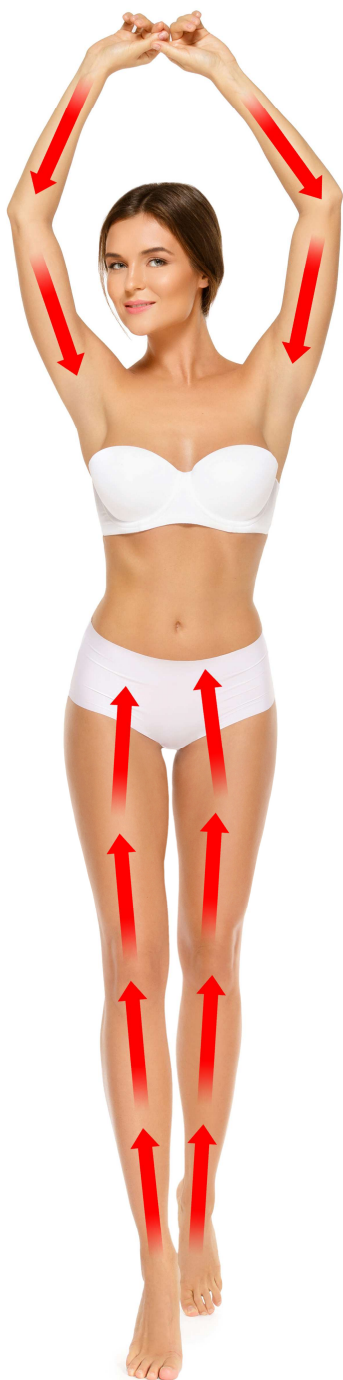

pohybová masáž



bodová masáž

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - VAKUOVÉ SÁNÍ

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



ČAS APLIKACE - RADIOFREKVENCE

Délku aplikace na pleti nelze stanovit s absolutní přesností podle pevně daných tabulek nebo jednotných časových údajů. Optimální délka stimulace pleti pomocí radiofrekvenčních vln se může lišit v závislosti na řadě individuálních faktorů, mezi které patří zejména aktuální stav pleti, věk uživatele, typ a citlivost pleti, stejně jako dlouhodobý způsob péče o pleť. V obecné rovině platí, že při úplně prvním použití by měla být aplikace krátká, zpravidla v řádu jednotek minut. Úvodní použití slouží především k tomu, aby uživatel mohl sledovat, jakým způsobem pleť na působení radiofrekvenčních vln reaguje, a jak rychle se po aplikaci vrací do běžného stavu, například z hlediska citlivosti na dotyk nebo přechodného zarudnutí. Na základě této individuální reakce lze následně orientačně upravit délku aplikace i časový rozestup mezi jednotlivými procedurami. Délka aplikace by měla vždy zohledňovat také velikost aplikované plochy. Aplikování celé plochy obličeje je časově náročnější než cílená aplikace na menší oblasti, například koutky úst nebo jemné vrásky v okolí očí.

Pokud vycházíme z běžné uživatelské praxe a orientačních zkušeností, stejnou oblast pleti je možné znovu aplikovat pomocí radiofrekvence zpravidla po uplynutí přibližně 7 až 10 dnů, vždy s ohledem na individuální reakci pleti a dodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhněte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

CO JE NORMÁLNÍ PO APLIKACI

- zarudnutí (obvykle ustoupí do 1–24 hodin),
- pocit tepla nebo „horké pleti“,
- mírný otok,
- jemná citlivost.

JAK POKOŽKU CO NEJLÉPE ZKLIDNIT

1) Chladit, ale ne ledem přímo

- Použijte **chladivý gelový sáček** nebo **studený obklad** zabalený v látce
- Chladte přibližně 5 až 10 minut v intervalech
- Nepřikládejte led přímo na kůži – může to způsobit podráždění či poškození

2) Nanést zklidňující přípravky

Vhodné jsou:

- **aloe vera gel** (čistý, bez parfemace),
- **panthenol** (např. ve formě pěny nebo krému),
- **termální voda ve spreji**,
- produkty s **niacinamidem** (snižuje zarudnutí),
- lehké **hydratační krémy bez alkoholu a parfemace**.

Vyhněte se:

- aktivním látkám jako **retinol, AHA/BHA kyseliny, vitamín C**,
- parfémovaným nebo mastným krémům.

3) Vyhnout se teplu 24–48 hodin

To znamená:

- sauna
- solárium
- horké sprchy
- intenzivní sportování (zvýšení teploty a pocení prodlouží zarudnutí)
- přímé slunce

4) Neškrábat a nedráždit pokožku

- Nemačkejte, nedrhňte, nepoužívejte peelingy.
- Pleť ponechejte v klidu.

5) Použití SPF

- Pokud jdete ven, naneste **SPF 30–50**, i když je zataženo.
- Pleť je po radiofrekvenci citlivější na UV záření.

- Běžné reakce odezní během **několika hodin až jednoho dne**.
- Citlivé pleti to může být **až 48 hodin**.

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU



METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

1. Čelo

- Pohybuj hlavicí **od středu čela směrem do stran k vlasové linii**
- Pohyby jsou **vodorovné, plynulé a lehce tažené ven**
- Postupuj po čele **odspodu nahoru**, aby byla pokryta celá plocha

2. Oblast mezi obočím (kořen nosu)

- Veď hlavicí **od kořene nosu směrem vzhůru ke středu čela**
- Pohyb je **rovný, jemný a tažený nahoru**

3. Nos

- Začni u kořene nosu
- Pohybuj se **směrem dolů po hřbetu nosu**
- Po stranách nosu veď pohyby **lehce šikmo ven směrem k tvářím**

4. Oční okolí (mimo oční víčka)

- Pohyby veď **po kostním okraji očnice**, nikdy ne přímo na víčko
- Začni u vnitřního koutku oka
- Pokračuj **obloukovým pohybem směrem ven a lehce nahoru k spánkům**
- Pohyb je **velmi jemný, pomalý a plynulý**

5. Tváře

- Začni u nosu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k uším a lehce nahoru**
- Pohyby mohou být:
 - obloukové
 - nebo krátké tahy směrem vzhůru
- Cílem je **podpora liftingového efektu**

6. Oblast nad horním rtem

- Neaplikuj přímo na rty
- Pohybuj hlavicí **od středu nad horním rtem směrem šikmo nahoru k nosním křídlům**
- Pohyb je **jemný a krátký**

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

7. Okolí úst

- Začni u koutků úst
- Veď pohyb **směrem ven a lehce nahoru**
- Vyhní se přímému kontaktu se rty
- Pohyby jsou **obloukové, zjemňující mimické linie**

8. Brada a oblast pod bradou

- Na bradě veď pohyby **od středu brady do stran**
- Pod bradou pohybuj hlavici **směrem vzhůru k čelisti**
- Pohyby jsou **tažené nahoru**, podporující zpevnění kontur

9. Krk

- Pohyby veď **od spodní části krku směrem vzhůru k bradě**
- Na stranách krku můžeš vést pohyb **šikmo nahoru**
- Vyhní se silnému tlaku v oblasti štítné žlázy

10. Dekolt


- Začni u středu dekoltu
- Pohybuj hlavici **směrem ven k ramenům**
- Pohyby jsou **široké, plynulé a jemně tažené**

Obecná doporučení

- Pohyby jsou vždy **plynulé, pomalé a kontrolované**
- Netlač, nech hlavici klouzat po pleti

Vždy se snaž pohybovat **směrem nahoru nebo ven**, nikoli dolů

MAPA CITLIVOSTI PLETI

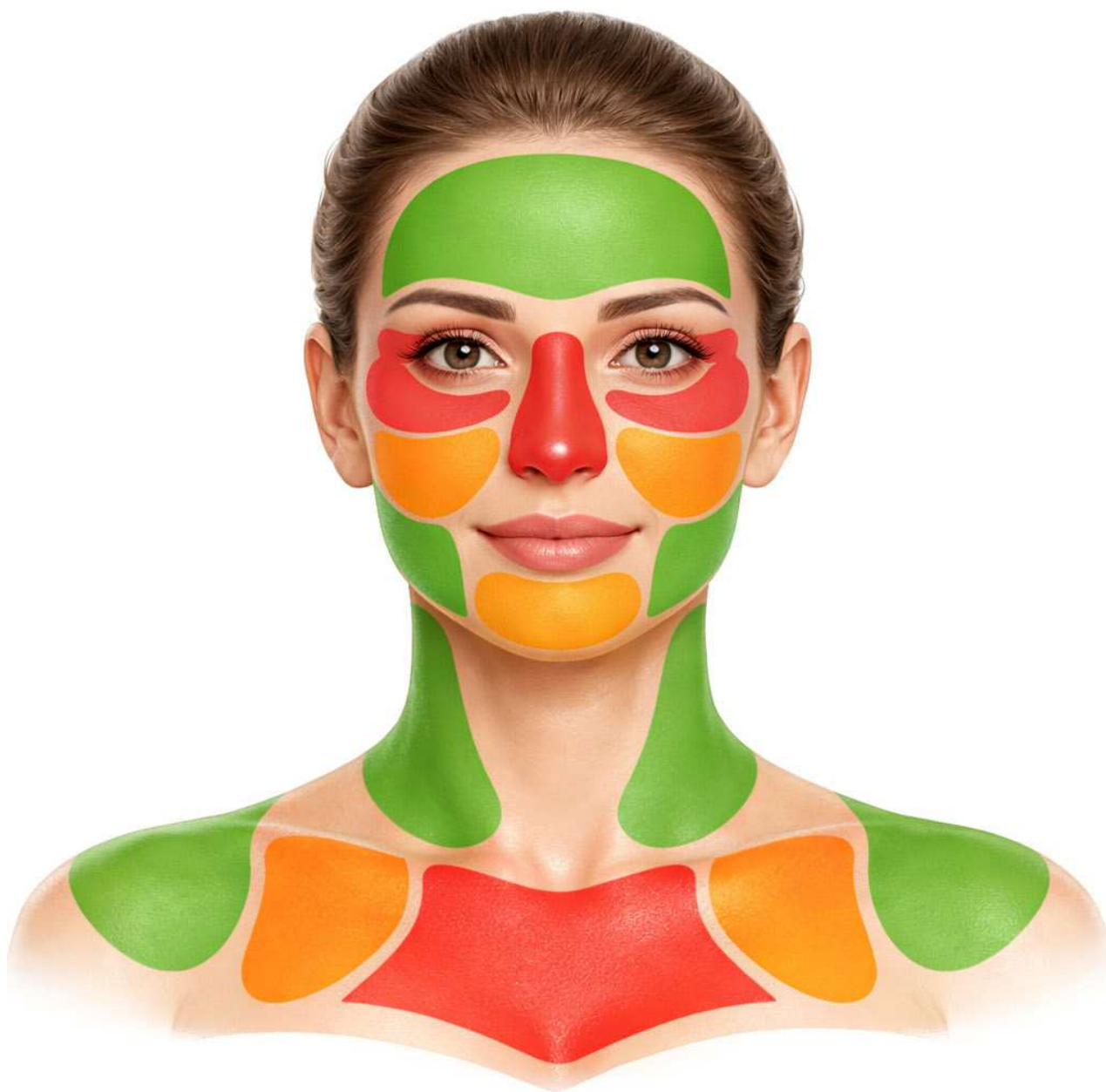

● NÍZKÁ CITLIVOST

● STŘEDNÍ CITLIVOST

● VYSOKÁ CITLIVOST

DOPORUČENÁ METODA POUŽITÍ HLAVIC

Při použití aplikační hlavice na vybrané části těla je třeba vždy vycházet z optimálního načasování délky kontaktu aplikačních kolíčků s pletí a vhodného dávkování intenzity radiofrekvenčních vln. V tomto směru si můžete pohyby přizpůsobit podle sebe. V případě aplikace druhé osoby aktivní komunikací sledujte míru, jakou uživatel vnímá projev tepla působením radiofrekvence. Zde jsou doporučené dvě možnosti práce s aplikační hlavicí:

RADIOFREKVENCE VE TŘECH PROVEDENÍCH



Upozorňujeme, že plastový kryt aplikační hlavice může během běžného používání vlivem okolního prostředí (teplota, mednické působení, UV záření atd.) vizuálně změnit svůj vzhled. Může se objevit efekt připomínající "popraskání" povrchu. Tento jev je zcela běžný, není důvodem k reklamaci a nijak neovlivňuje samotnou činnost a výkon hlavice.


plynulý pohyb

Aplikační hlavici se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí sonogelu. **Nikdy nepoužívejte stimulaci pleti aplikační hlavici „na sucho“.** Při stimulaci pleti plynulým pohybem je celkově zkrácen čas kontaktu aplikačních kolíčků s konkrétním místem. **Při konstantním nastavení úrovně intenzity radiofrekvence můžete při rychlejším pohybu vnímat menší míru působení radiofrekvence ve srovnání s pomalejším pohybem.**

**razítkování**

Při aplikaci vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu pár sekund (tzv. razítkováním). Intenzitu přidávejte vždy podle pocitu.



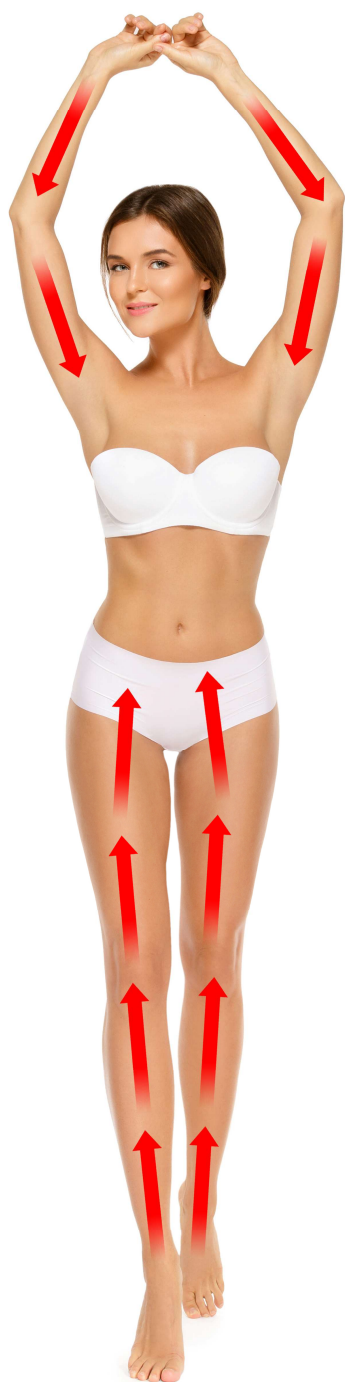

plynulý pohyb



razítkování

SMĚRY POHYBU HLAVICE NA TVÁŘI S VAKUOVOU HLAVICÍ

Při pohybu aplikační vakuové hlavice na tváři je vždy třeba následovat směr šipek na níže uvedeném obrázku.



BEAUTYRELAX VIDEA NA YOUTUBE

Použití obdobného přístroje se srovnatelnými hlavicemi.



ÚČEL POUŽITÍ OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE

BeautyRelax Oscilmax GS Tripple je masážní přístroj určený pro kosmetickou péči o tělo a podporu zlepšení vzhledu pokožky se sklony k nerovnostem (tzv. „pomarančový“ efekt). Technologie je založena na vysokofrekvenčních oscilacích aplikační hlavice, které vytvářejí intenzivní mechanickou stimulaci aplikované oblasti. Oscilační pohyb se přenáší z povrchu pokožky do podkožních struktur a je v kosmetické praxi spojován s podporou mikrocirkulace a pevnějšího vzhledu pokožky. Přístroj umožňuje plynulé nastavení intenzity podle individuální citlivosti a preferencí uživatele. Při nižším nastavení výkonu lze přístroj využít jako relaxační masážní pomůcku pro navozování pocitu uvolnění ve svalových partiích.

Efektivní použití přístroje je založeno na regulovatelném oscilačním pohybu hlavice. Rychlost lze nastavit pomocí otočného ovladače. Intenzitu působení lze dále přizpůsobit:

- volbou rychlosti oscilací,
- přítlakem na aplikovanou oblast,
- rychlostí pohybu hlavice po pokožce.

Pro intenzivnější kosmetickou stimulaci lze zvolit vyšší rychlost a větší přítlak. Pro jemnou relaxační masáž postačí nižší rychlost a lehký kontakt s pokožkou. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují pohodlné použití i na hůře dostupných partiích těla. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické a relaxační účely. Nejedná se o zdravotnický prostředek ani o zařízení určené k léčbě, diagnostice či prevenci onemocnění. Výsledný efekt je individuální a závisí na pravidelnosti používání a celkovém životním stylu.

- NASTAVENÍ RYCHLOSTI HLAVICE
- KOMPAKTNÍ RUČNÍ PROVEDENÍ
- 3 VYMĚNITELNÉ APLIKÁTORY
- VYSOCE EFEKTIVNÍ 5D OSCILACE
- ÚČINNÉ A BEZPEČNÉ POUŽITÍ
- SNADNÁ OBSLUHA




UVOLNĚNÍ SVALŮ/REDUKCE CELULITIDY

Přístroj BeautyRelax Oscilmax GS Tripple nabízí univerzální použití díky vyměnitelným hlavicím a možnosti nastavení rychlosti oscilací. Je určen pro kosmetickou péči o tělo a relaxační masáž.

Intenzitu působení lze regulovat dvěma způsoby:

- nastavením rychlosti oscilace hlavice,
- přitlakem, který vyvíjíte na aplikovanou partii.

Pro jemnou a uvolňující masáž doporučujeme zvolit nižší úroveň oscilace, hlavici s většími masážními body a lehčí přitlak. Pro intenzivnější mechanickou stimulaci pokožky se sklony k nerovnostem (tzv. „pomerančový“ vzhled) lze zvolit vyšší úroveň oscilace, hlavici s menšími masážními body a přiměřený přitlak dle individuální citlivosti. Pravidelným používáním si postupně osvojíte vhodnou techniku a nastavení, které vám bude nejvíce vyhovovat. Přístroj tak může sloužit jako praktická pomůcka pro domácí kosmetickou péči a relaxaci.

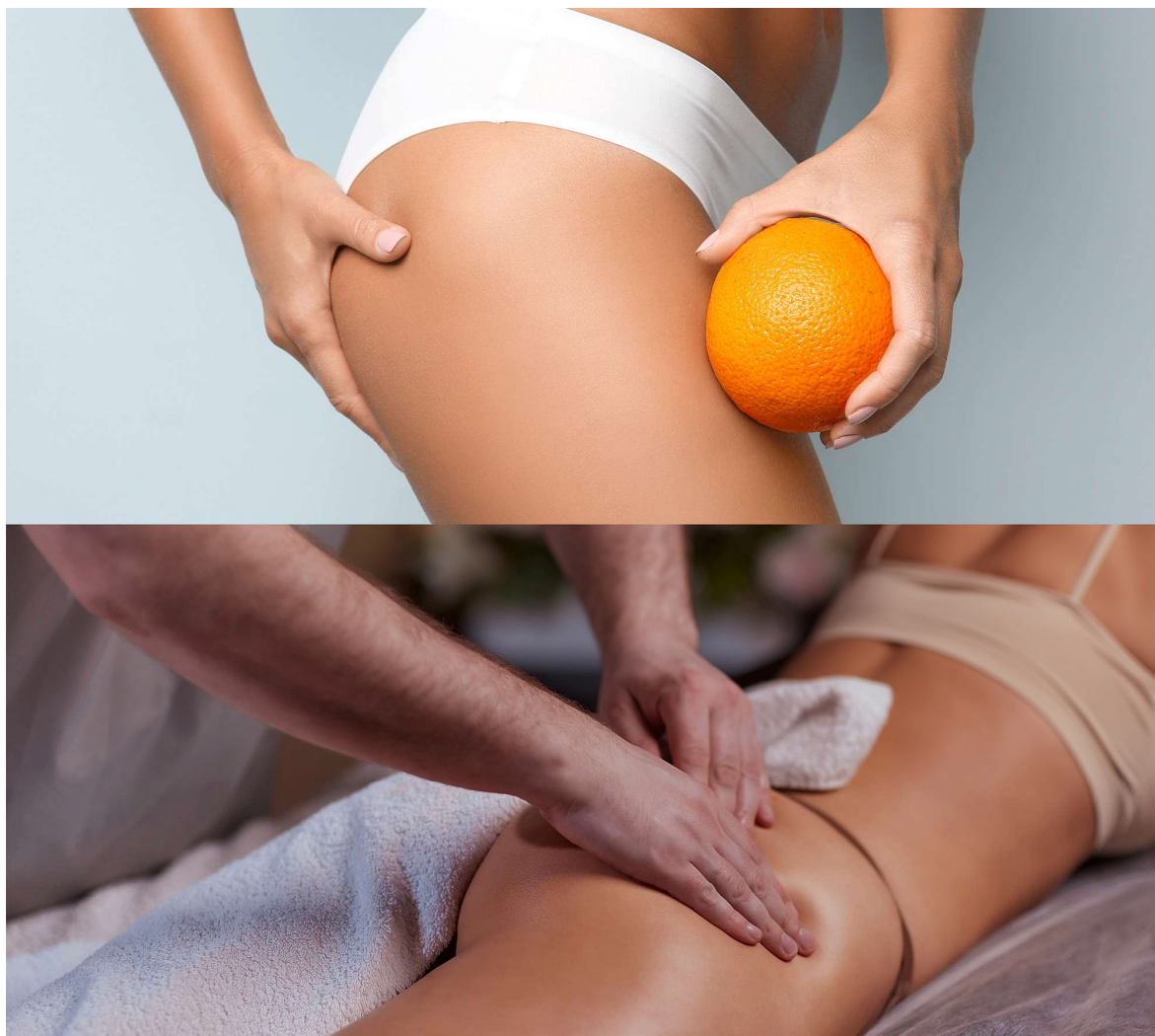

POUŽITÍ MASÁŽNÍHO OLEJE NEBO GELU

Pro maximální účinnost použití doporučujeme nanést na pokožku masážní olejček nebo gel. Aplikační hlavici přístroje se vám bude pohybovat po pleti velmi snadno. Pokud obsahuje přípravek další přidané látky jako vitamíny nebo vonné esence, velmi snadno je pomocí přístroje zapracujete do pleti. Po aplikaci je tělo příjemně provoněné. Pokud je přístroj používán pro účely potlačení projevů celulitidy, můžete použít krém na celulitidu vaší oblíbené značky. Použití přípravku však vyžaduje zvýšenou pozornost v péči o aplikační hlavici. Po použití vždy otřete a aplikační hlavice zbytky přípravku. Pokud používáte přístroj pro komerční účely nebo přístroj sdílí více uživatelů, doporučujeme po každém použití dezinfikovat aplikátor pomocí roztoku na alkoholové bázi. Zabráníte tak případnému šíření bakterií.



HLAVNÍ BENEFITY OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE

- Neinvazivní kosmetická aplikace (bez narušení integrity pokožky)
- Při správném použití dle návodu komfortní používání
- Intenzitu lze individuálně přizpůsobit citlivosti uživatele
- Vysokofrekvenční oscilační masáž určená pro kosmetickou péči o tělo
- Mechanická stimulace podporuje mikrocirkulaci v aplikované oblasti
- Pokožka může působit jemněji a pružněji na dotyk
- Při pravidelném používání v kombinaci se zdravým životním stylem může přispět ke zlepšení vzhledu pokožky se sklony k nerovnostem
- Podporuje pevnější a kompaktnější vzhled vybraných partií
- Přispívá k celkovému vyhlazenějšímu vzhledu pokožky
- Kosmetická podpora formování stehen, hýždí, břicha, boků nebo paží
- Navozuje pocit uvolnění ve svalových partiích
- Oblasti použití: vnější a vnitřní strana stehen, paže, hýždě, břicho
- Možnost nastavení rychlosti oscilací aplikační hlavice
- 3 vyměnitelné hlavice s odlišnou povrchovou strukturou
- Protiskluzová rukojeť umožňující regulaci intenzity přitlakem
- Vhodné pro náročné uživatele
- Konstrukčně přizpůsobeno i pro provoz s vyšší frekvencí používání
- Kvalitní komponenty zajišťující dlouhodobou mechanickou odolnost
- Určeno výhradně pro kosmetické a estetické účely. Nejedná se o zdravotnický prostředek ani o zařízení určené k léčbě, diagnostice či prevenci onemocnění. Výsledný efekt je individuální a závisí na pravidelnosti používání a celkovém životním stylu.





NASTAVENÍ RYCHLOSTI
POHYBU HLAVICE

PROTISKLUZOVÁ
RUKOJEŤ



SNADNÁ VÝMĚNA
APLIKAČNÍ HLAVICE

VÝZNAM APLIKAČNÍCH HLAVIC OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE



Velké kontaktní body

- Vhodné pro velké skupiny svalů.
- Uvolňuje svalovou tensi.
- Regeneruje svalovou tkáň po náročné fyzické aktivitě.
- Efektivně rozkmitá tukovou tkáň.



Střední kontaktní body

- Tvarem imitují konečky prstů.
- Velmi intenzivní bodová masáž.
- Účinná podpora činnosti lymfatického systému.



Jemné kontaktní body

- Intenzivní podpora krevního běhu.
- Přispívá ke zlepšení pružnosti pleti.
- Vhodné pro partie s vyšší citlivostí pokožky.
- Odvodnění a tonizace pokožky.


MOŽNOSTI POUŽITÍ OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE




MOŽNOSTI POUŽITÍ OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE



MOŽNOSTI POUŽITÍ OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE

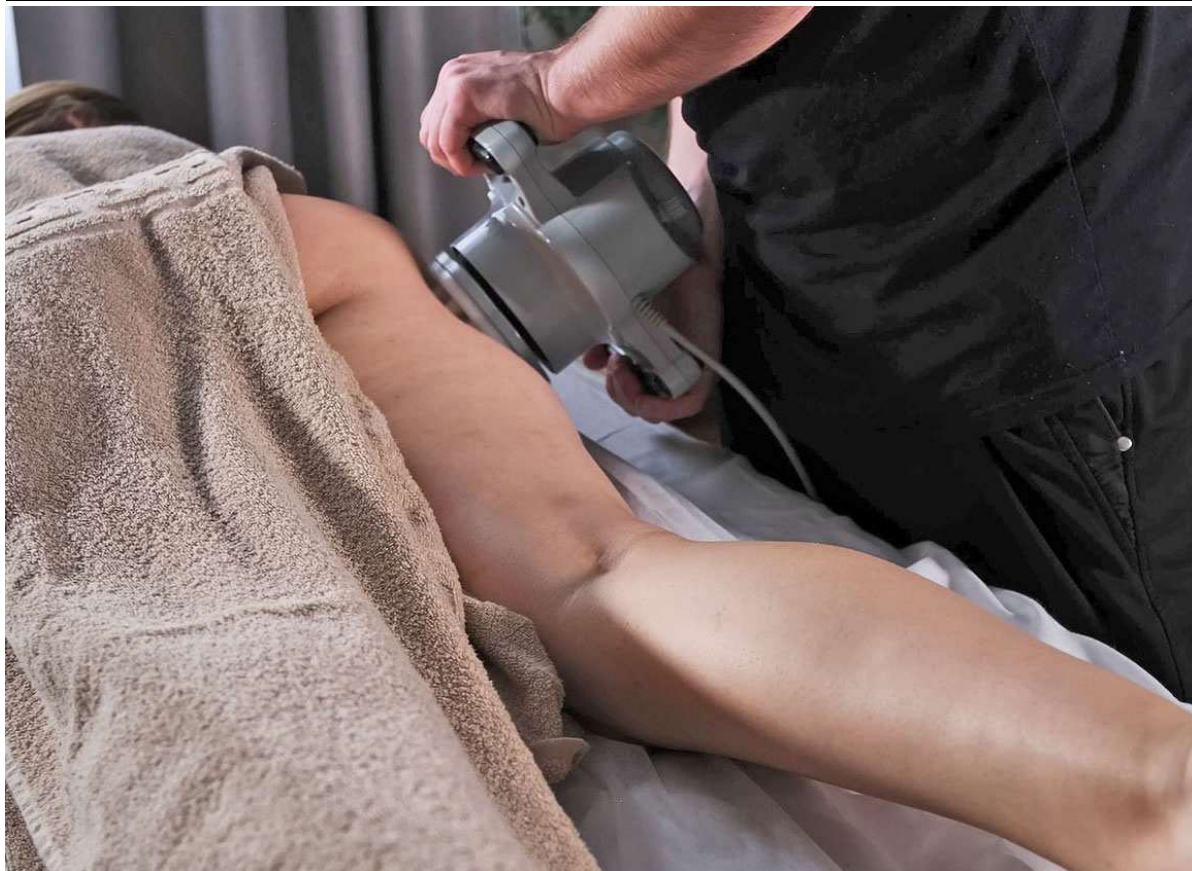

BEAUTYRELAX VIDEO NA YOUTUBE

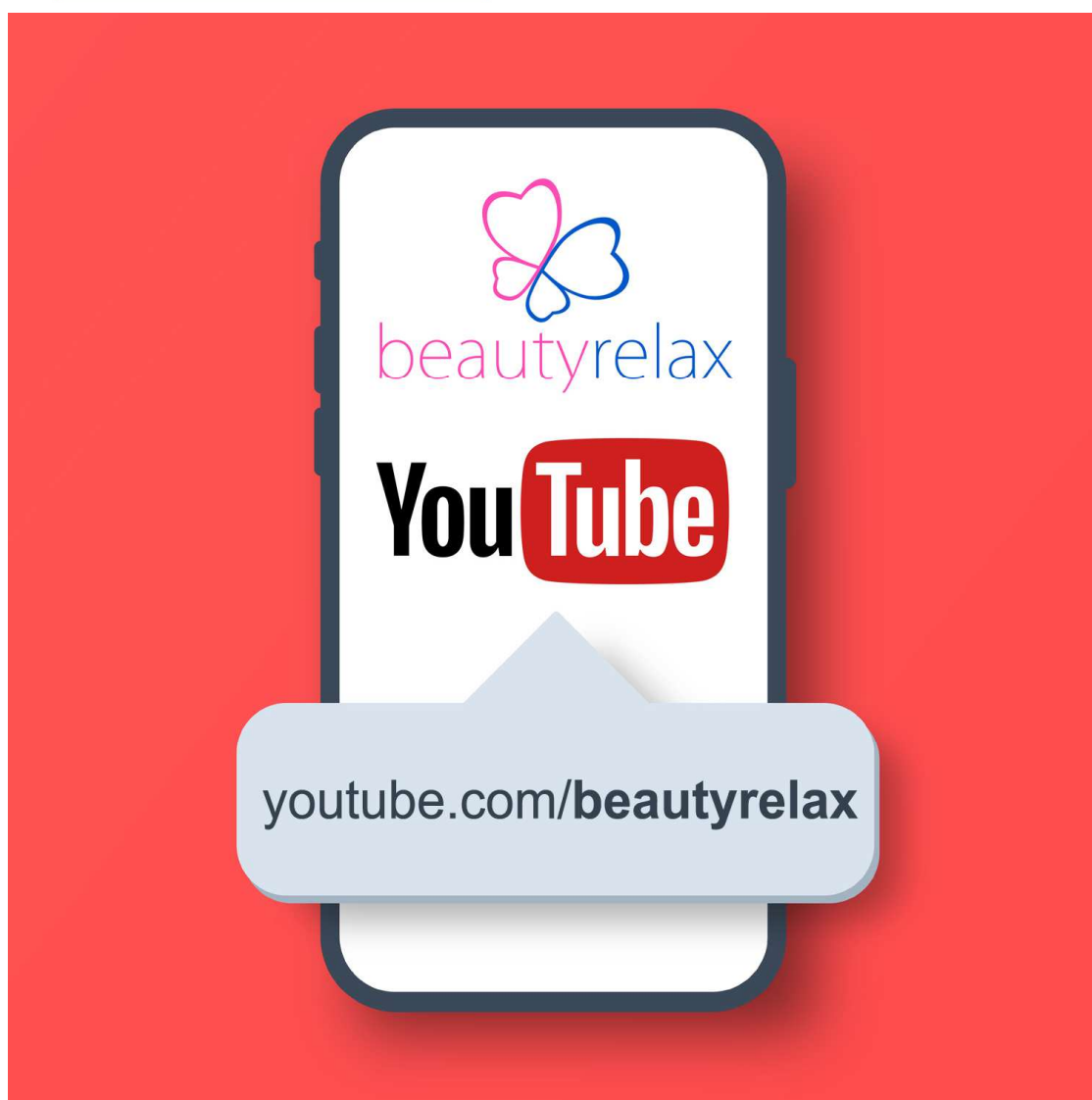

POPIS OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE



VELKÉ
KONTAKTNÍ BODY




STŘEDNÍ
KONTAKTNÍ BODY



JEMNÉ
KONTAKTNÍ BODY

**APLIKAČNÍ HLAVICE
SE UPEVNŮJE K PŘÍSTROJI
POMOCÍ ŠROUBOVÉHO ZÁVITU**

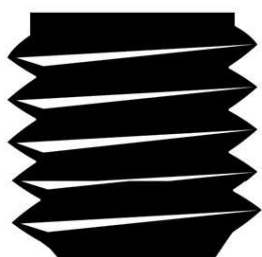

SMĚR UTAŽENÍ
SMĚR UVOLNĚNÍ



POUŽITÍ OSCILAČNÍHO PŘÍSTROJE

1. Použijte aplikační hlavici dle účelu použití. Hlavici vyměňujte vždy, když je přístroj vypnutý. **Hlavice je uchycena pomocí závitů. Hlavici tedy klasicky vyšroubujte (směrem doleva) pro odstranění. Pro instalaci hlavice aplikátor zašroubujte ve směru pohybu hodinových ručiček (doprava).**
2. Připojte přístroj pomocí kabelu k elektrické zásuvce.
3. Přístroj používejte na místě s ohledem na vzdálenost elektrické zásuvky. V průběhu použití přístroje by neměl být kabel extrémně napnutý. Mohlo by dojít k jeho vytržení. Pokud to situace vyžaduje, použijte prodlužovací kabel.
4. Aplikujte na pokožku masážní olej, krém nebo gel. Výrazně tím usnadníte pohyb aplikační po pleti.
5. Pomocí otočného kolečka na přístroji nastavte rychlost oscilací.
6. Použití přístroje musí být uživateli příjemné a musí se cítit komfortně. Podle toho je třeba upravit sílu tlaku, kterým se působí na tělo.
7. Vždy je dobré začínat na nižším výkonu oscilace. Rychlost oscilací je možné přidávat postupně s plynulým dávkováním.
8. Po použití přístroje může pleť zarudnout. Jde o přirozený projev působením oscilací masážního mechanismu. Čím je v průběhu aplikace použita větší rychlost a tlak, tím je zásah na tělo intenzivnější a může se to projevit zarudnutím pleti na větší ploše. Intenzitu masáže si také můžete snadno regulovat tlakem přístroje na pleť pomocí rukou.
9. Aplikační hlavice přístroje pravidelně čistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Přístroj není vodotěsný. Žádnou část přístroje nevystavujte proudu tekoucí vody.
10. Pokud je přístroj sdílen mezi více uživateli, aplikační hlavici pravidelně dezinfikujte roztokem na alkoholové bázi. Zabráníte tak šíření bakterií.
11. Po použití vždy odpojte přístroj ze zásuvky.



ÚČEL POUŽITÍ MADERO VÁLCE

Přístroj BeautyRelax je kosmetická pomůcka určená pro podporu zlepšení vzhledu pokožky pomocí masážní techniky inspirované maderoterapií. 3D masážní mechanismus vytváří intenzivní mechanickou stimulaci pokožky a podkožních struktur. Účinek je založen na působení masážních kuliček integrovaných do elektronicky otočného válce s možností regulace rychlosti otáček. Intenzitu masáže lze dále upravit přitlakem dle individuální citlivosti. Mechanická stimulace je v kosmetické praxi spojována s podporou mikrocirkulace a se zlepšením vzhledu pokožky se sklony k nerovnostem (tzv. „pomerančový“ efekt). Aplikace může přispět k pevnějšímu a hladšímu vzhledu pleti a navozuje pocit uvolnění ve vybraných partiích těla. Neinvazivní charakter použití znamená, že nedochází k narušení integrity pokožky. Určeno zejména pro partie: břicho, boky, hýždě, stehna, lýtka.



Výsledný efekt je individuální a závisí na pravidelnosti používání a celkovém životním stylu. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické a estetické účely. Nejedná se o zdravotnický prostředek ani o zařízení určené k léčbě či prevenci onemocnění.

MADEROTERAPIE

Maderoterapie (terapie dřevem) je masážní technika, která využívá anatomicky navržené dřevěné nástroje ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Tyto nástroje umožňují vysoce cílený tlak na problematické partie (např. stehna, hýždě, boky nebo břicho). Tlak zintenzivňuje odbourávání tukových zásob a vláknité celulitidy.

Masáž stimuluje lymfatický odvodňovací systém a odstraňuje z těla nepotřebnou vodu a toxické látky. Také zlepšuje vzhled celulitidy a zároveň vypíná pokožku. Anticelulitidní aplikace se doporučuje provádět každý druhý den (alespoň třikrát týdně). Přináší rychlé výsledky tvarování těla, redukci a snížení projevů celulitidy.

Tento typ masáže provádět prakticky na celém těle: na nohou, břiše, pase, bocích, zádech a pažích, stejně jako na obličeji a části krku (dvojitá brada). Jednou z velkých výhod aplikace je, že je zcela přirozené, protože se provádí dřevěnými nástroji a je neinvazivní.



Hlavní výhody masážní metody:

- Potlačení projevů celulitidy.
- Aktivuje krevní a lymfatický oběh.
- Zvýraznění kontur a tvarování postavy.
- Odvodnění a tonizace pokožky.
- Dosažení relaxačního účinku na svaly.
- Dodatečná hydratace pokožky.
- Stimulace energetické rovnováhy.

MADEROTERAPIE PRO RŮZNÉ ČÁSTI TĚLA







VLASTNOSTI & SPECIFIKACE MADERO VÁLCE

- V Kosmetická metoda určená pro zlepšení vzhledu pokožky se sklony k nerovnostem (tzv. „pomerančová“ struktura)
- Lokální mechanická stimulace pokožky a podkoží
- Přispívá k pevnějšímu a hladšímu vzhledu pleti
- Navozuje pocit uvolnění ve vybraných partiích těla
- Neinvazivní kosmetická aplikace (bez narušení integrity pokožky)
- Při správném použití dle návodu komfortní aplikace
- Doporučené partie použití:
- břicho, boky, hýždě, stehna, lýtka
- Rozsah frekvence otáček: 40–320 Hz
- Průměr masážní kuličky: 2,5 cm
- Počet masážních kuliček: 39
- Konstrukce: kovové provedení pro zvýšenou mechanickou odolnost
- Napájení: síťový adaptér 220 V
- Celkové rozměry: 55 × 6 × 6 cm
- Šířka rotační plochy: 19 cm
- Hmotnost: 4,9 kg
- Určeno výhradně pro kosmetické a estetické účely. Nejedná se o zdravotnický prostředek ani o zařízení určené k léčbě či prevenci onemocnění. Výsledný efekt je individuální a závisí na pravidelnosti používání a celkovém životním stylu.




VAROVÁNÍ

UŽIVATEL PŘÍSTROJE MUSÍ VŽDY ZABEZPEČIT, ABY SE V PŘÍPADĚ DLOUHÝCH VLASŮ NEZAMOTALY DO MASÁŽNÍHO VÁLCE. DOŠLO BY K FATÁLNÍ ÚJMĚ NA ZDRAVÍ.

POPIS MADERO VÁLCE

- 1.** *Rukojeť*
- 2.** *Tlačítko pro uvolnění rukojeti*
- 3.** *Rotační masážní elektronický mechanismus*

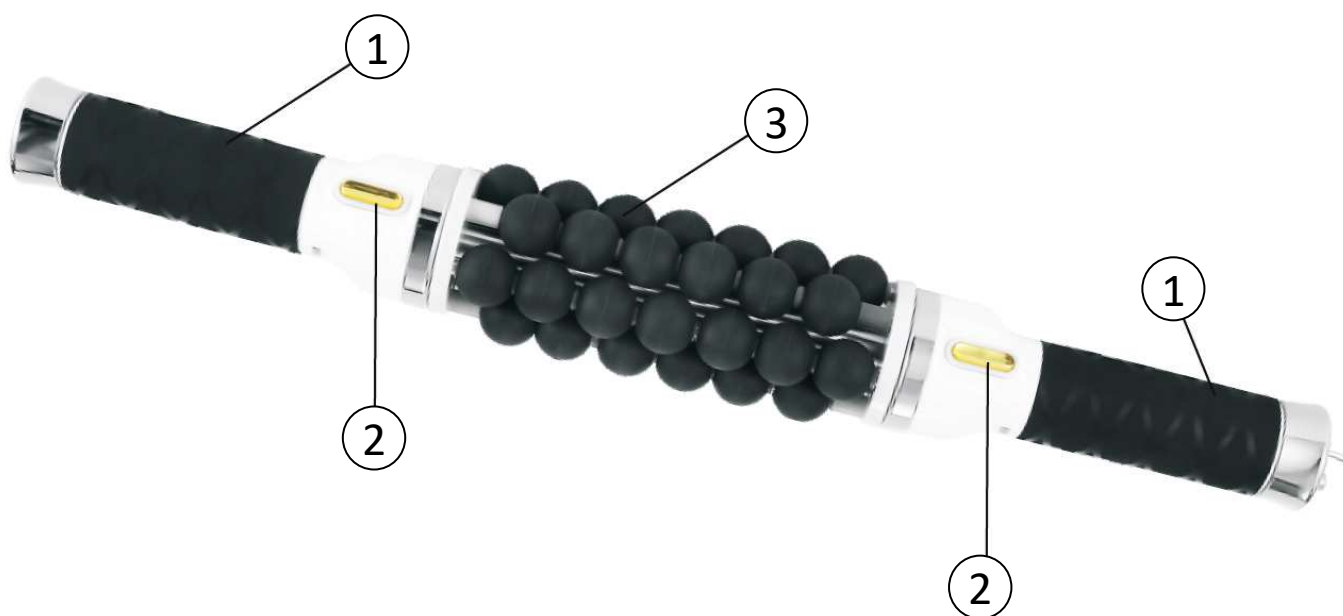

POPIS MADERO VÁLCE

- 1.** Vidlice pro vložení do elektrické sítě 220V
- 2.** Otočné kolečko pro ruční regulaci otáček masážního mechanismu




POPIS MADERO VÁLCE

1. Páčka pro změnu směru rotace masážního mechanismu. Páčka nabízí celkem tři polohy nastavení:

- jeden směr pohybu masážního mechanismu
- opačný směr masážního mechanismu
- vypnuto (středová poloha)

2. Vstup pro konektor napájecího adaptéru 220V

Poznámka: Novější verze přístroje jsou namísto páčky vybaveny klasickým spínacím tlačítkem s polohami I, vypnuto, II.

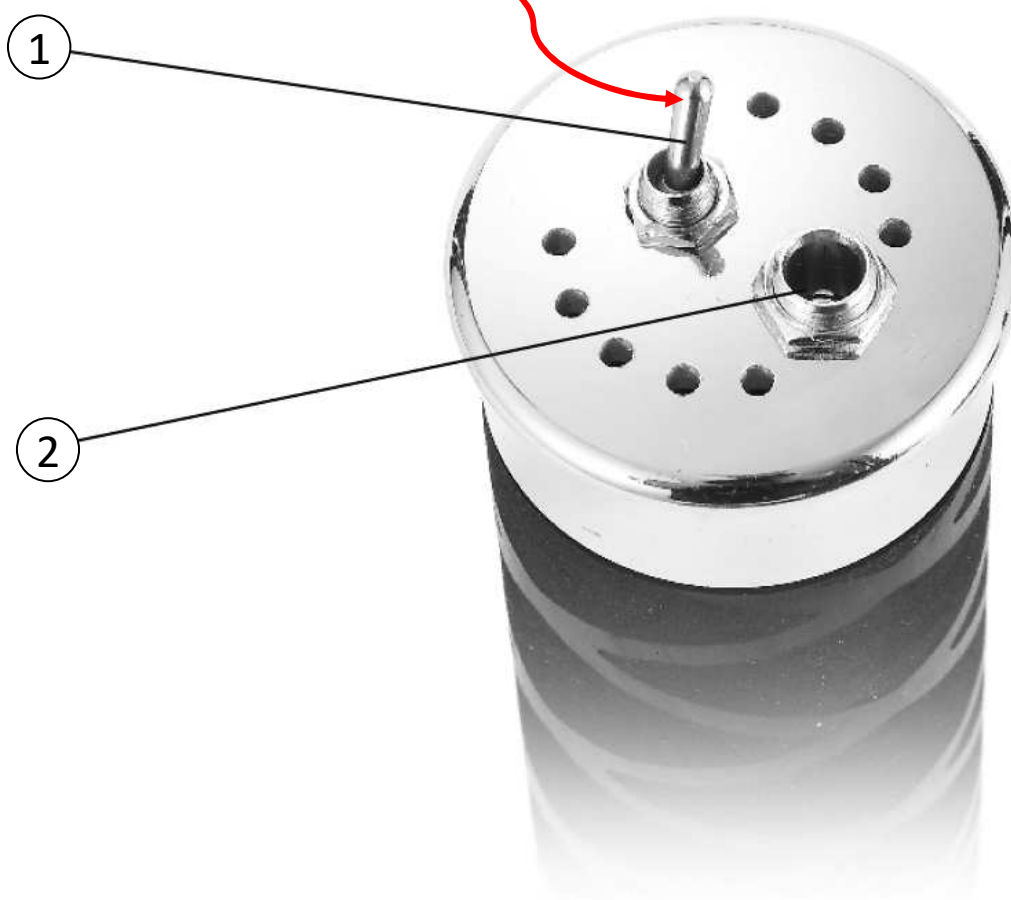


UVOLNĚNÍ RUKOJETI MADERO VÁLCE

Přístroj se skládá ze tří hlavních částí - dvou rukojetí a hlavního masážního mechanismu. Rukojeť je možné snadné odpojit. Postupujte následovně:

- 1.** *Držte mechanické tlačítko*
- 2.** *Rukojeť vysuňte ve směru šipky*



ROZMĚRY MADERO VÁLCE

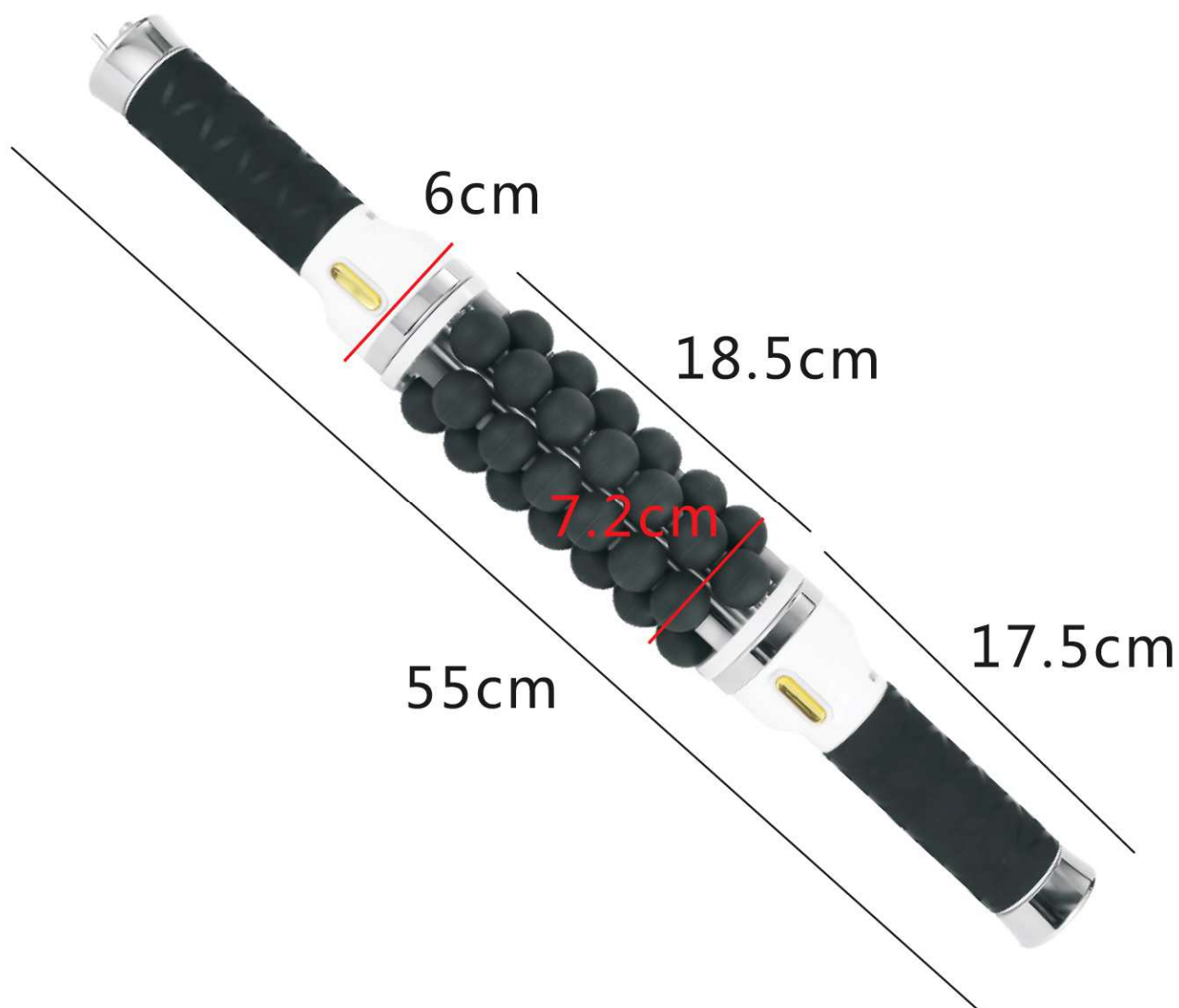

POUŽITÍ MADERO VÁLCE

- Příklad je uložen v přepravním kufříku v rozloženém stavu.
- K hlavní elektronické masážní jednotce připojte obě rukojeti.
- Připojte přístroj k napájecímu adaptéru.
- Před použitím přístroje vizuálně ověřte, zda se mezi kuličkami masážního mechanismu nenachází žádný předmět, který by tvořit fyzickou překážku v rotaci celého masážního bloku.
- Pomocí páčky na boční straně rukojeti si nastavte směr pohybu masážního mechanismu. Novější verze přístroje jsou namísto páčky vybaveny klasickým spínacím tlačítkem s polohami I, vypnuto, II.
- Pomocí otočné kolečka na adaptéru nastavte rychlost otáček.
- Použití přístroje musí být uživateli příjemné a musí se cítit komfortně. Podle toho je třeba upravit sílu tlaku, kterým se působí na tělo.
- Vždy je dobré začínat na nižších otáčkách masážního mechanismu. Otáčky je možné přidávat postupně s plynulým dávkováním.
- Délku a místo masáže upravte podle potřeby uživatele, který přístroj používá.
- Po použití přístroje může pleť zarudnout. Jde o přirozený projev působení masážního mechanismu. Čím je v průběhu použití použita větší rychlost a tlak, tím je zásah na tělo intenzivnější a může se to projevit zarudnutím pleti na větší ploše.
- Masážní kuličky přístroje pravidelně čistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Příklad není vodotěsný. Žádnou část přístroje nevystavujte proudu tekoucí vody.
- Po použití odpojte přístroj od napájecího adaptéru.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

DOPORUČENÝ POSTUP POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Před zahájením použití si pečlivě prostudujte celý návod k obsluze, zejména část věnovanou kontraindikacím a bezpečnostním upozorněním. Pokud si nejste jisti vhodností použití s ohledem na svůj zdravotní stav, doporučujeme konzultaci s lékařem.

Používejte přístroj pouze na určené partie těla uvedené v návodu. Během aplikace si zajistěte pohodlí a uvolněné prostředí.

KOMBINACE JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ

Ultrazvuk, světelná energie (červené světlo), radiofrekvence a vakuová masáž mají rozdílný charakter působení, a proto se liší i doporučené intervaly jejich použití.

- V jeden den je možné kombinovat více technologií, pokud dodržíte doporučené časy aplikace pro jednotlivé partie.
- Mezi opakovaným použitím stejné technologie na stejné partii dodržujte doporučený časový odstup (obvykle 7–10 dní u ultrazvuku a radiofrekvence).

PRO KOHO JE PŘÍSTROJ VHODNÝ

Přístroj je určen pro osoby, které chtějí podpořit svůj vzhled pomocí neinvazivních kosmetických technologií.

Není určen jako řešení nadváhy ani jako náhrada zdravého životního stylu. V případě výrazné nadváhy doporučujeme konzultaci s lékařem nebo nutričním specialistou.

DOPORUČENÍ PŘED A PO APLIKACI ULTRAZVUKU NEBO SVĚTELNÉ TECHNOLOGIE

- Několik hodin před aplikací preferujte lehčí stravu.
- Zvyšte příjem čisté vody (cca 2 litry denně, dle individuálních potřeb).
- Vyhněte se nadměrné konzumaci alkoholu.
- Po aplikaci je vhodná lehká pohybová aktivita (např. svižná chůze).

Tato doporučení slouží jako součást celkového režimu podpory zdravého životního stylu.

VNÍMÁNÍ BĚHEM APLIKACE

- Ultrazvuk může být doprovázen jemným akustickým projevem nebo mírným mravenčením.
- Radiofrekvence a světelná energie mohou vyvolat pocit tepla.
- Vakuová hlavice může způsobit dočasné začervenání pokožky.

Intenzitu vždy nastavujte individuálně podle citlivosti. Pokud je pocit nepříjemný, výkon snižte.

BEZPEČNOST

Při správném použití podle návodu je přístroj určen pro bezpečné kosmetické využití.

Nepoužívejte:

- v oblasti srdce, hlavy a lymfatických uzlin,
- v těhotenství,
- při přítomnosti kardiostimulátoru nebo jiných implantovaných elektronických zařízení,
- při kožních infekcích nebo otevřených poraněních.

PÉČE O APLIKAČNÍ HLAVICE

Po každém použití hlavice důkladně očistěte a osušte. Při použití na více osobách je nutná dezinfekce vhodným prostředkem (ideálně bez alkoholu, dle doporučení výrobce).

Přístroj není vodotěsný. Žádná část není určena k mytí pod tekoucí vodou.

JAKÉ VÝSLEDKY LZE OČEKÁVAT

Výsledný efekt je individuální a závisí na:

- pravidelnosti používání,
- typu pokožky,
- životním stylem,
- nastavení intenzity.

Přístroj je určen jako podpůrný nástroj kosmetické péče. Nejedná se o zdravotnický prostředek a není určen k léčbě, diagnostice ani prevenci onemocnění.

CERTIFIKACE

Přístroj splňuje požadavky platných evropských předpisů pro zařízení tohoto typu a je označen příslušnou shodou (CE).

ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU

1. ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Odstraňte zbytky sonogelu / nanášeného přípravku.
- Hlavici otřete měkkým, suchým ubrouskem (např. mikrovlákno) nebo vatičkou.
- Pokud je gel zaschlý, použijte **vlhčený ubrousek bez alkoholu (určený pro elektroniku nebo zdravotnickou techniku)**.

Důležité: Na plastové části hlavičky se NESMÍ dostat alkohol – může dojít k jejich poškození, popraskání nebo zmatnění povrchu.

2. DEZINFEKCE (POKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ VÍCE OSOB)

Postup dezinfekce:

- Používejte **speciální dezinfekční ubrousky bez obsahu alkoholu**, určené pro citlivé plastové povrchy a zdravotnická zařízení.
- Pokud používáte dezinfekční roztok, vždy jej nejprve naneste na hadřík (NIKDY přímo na hlavici!).
- Jemnými pohyby otřete povrch hlavičky.
- Nechte zcela vyschnout nebo otřete do sucha čistým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte dezinfekci na bázi alkoholu na plastové části hlavičky.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (aceton, čpavek, chlor).

3. OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

- Hlavici **NENAMÁČEJTE** – voda může poškodit elektroniku.
- Zabraňte vniknutí tekutiny do spojů a otvorů.
- **Po čištění vždy důkladně osušte suchým hadříkem.**

4. DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA

- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, můžete aplikovat tenkou vrstvu antiseptického přípravku na kovové části hlavičky (nikdy ne na plast a nikdy ne na bázi alkoholu).
- Skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

5. UPOZORNĚNÍ

- Neponořujte hlavici do vody ani čisticích roztoků.
- Nepoužívejte abrazivní materiály (kartáče, drátěnky).
- Nepoužívejte horkou vodu ani páru.
- Zabraňte kontaktu plastových částí s alkoholem.

DOPORUČENÍ PRO PRODLUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

- Čistěte hlavici ihned po použití – zabráníte zasychání gelu.
- Při dezinfekci používejte výhradně prostředky bez obsahu alkoholu.
- Ideální jsou speciální dezinfekční ubrousky bez alkoholu určené pro plastové a citlivé povrchy.
- Pravidelně kontrolujte stav hlavice (praskliny, koroze, změna barvy plastu).

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma **SANTADRIA s.r.o.**, IČO: 29195454, DIČ: CZ29195454, tímto informuje zákazníka, že výrobek je určen ke **masážním a relaxačním** v souladu s návodem k obsluze a **není zdravotnickým prostředkem** ani neslouží k diagnostice, prevenci nebo léčbě jakéhokoli onemocnění.

Prodávající odpovídá za vlastnosti výrobku v rozsahu stanoveném **platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky**, zejména za shodu výrobku s technickými a bezpečnostními požadavky v okamžiku jeho uvedení na trh.

Prodávající **nenese odpovědnost za škody nebo újmy**, které vzniknou v důsledku:

- používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bezpečnostními pokyny nebo určeným účelem použití,
- neodborného, nevhodného nebo nadměrného používání výrobku,
- používání výrobku osobami, u nichž je jeho použití podle návodu kontraindikováno,
- zásahů do výrobku, jeho úprav, oprav nebo manipulace provedených neoprávněnou osobou,
- používání výrobku v rozporu s platnými právními předpisy v zemi, kde je výrobek používán.

V případě **komerčního používání výrobku** bere zákazník na vědomí, že **odpovědnost za splnění veškerých požadavků vyplývajících z platné legislativy**, zejména v oblasti odborné způsobilosti obsluhy, licencí, povolení nebo jiných zákonných podmínek, **nese výhradně provozovatel** zařízení. Prodávající nenese odpovědnost za právní důsledky vyplývající z komerčního používání výrobku v rozporu s právními předpisy platnými v konkrétní jurisdikci.

Tato doložka **neomezuje ani nevylučuje práva zákazníka**, která mu náleží podle závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele, ani odpovědnost prodávajícího za vady výrobku či škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu, v jakém ji nelze podle práva vyloučit.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz

beautyrelax

PO - PÁ 11:00 - 18:00
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Multifunkční přístroj BODYFACE MULTISHAPE MADERO PROFESSIONAL

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-3100**

EAN 8594166124004

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60601-1-2:2007 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008 EN 60601-1:2006+A11:2011

EN 60825-1:2007

Produkt není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného onemocnění. Je určen pro rekondiční masáž těla vakuem a působením tepla. Při nastavení nízkých hodnot výkonu přístroje nedosahuje vyššího tepla než 42°C.

Technologiemi a funkcemi je určen pro použití v kosmetických a masážních studiích.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.1.2025


SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel