

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-3040

ANTIAGE OXYGEN
STUDIO PERFORMANCE



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
SLOVO ÚVODEM	5
UPOZORNĚNÍ	6
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	7
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE	8
HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ SONOGELU	8
TECHNICKÉ PARAMETRY	9
OBSAH BALENÍ	9
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	10
MOŽNOSTI APLIKACE	10
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	11
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC [TECHNOLOGIÍ]	12
POPIS PŘÍSTROJE	13
INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA	16
VODNÍ DERMABRAZE	17
VODNÍ DERMABRAZE - POPIS DISPLEJE	20
VODNÍ DERMABRAZE - POSTUP POUŽITÍ	21
PLASMA	23
PLASMA POPIS DISPLEJE	24
PLASMA - POPIS HLAVICE	25
PLASMA - POSTUP POUŽITÍ	27
RADIOFREKVENCE	28
RADIOFREKVENCE - POPIS DISPLEJE	29
RADIOFREKVENCE - POPIS HLAVICE	30
RADIOFREKVENCE - POSTUP POUŽITÍ	31
POZNÁMKY K POUŽITÍ RADIOFREKVENCE	31
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	32
ULTRAZVUK - MAXI & MINI HLAVICE	34
ULTRAZVUK MINI HLAVICE - POPIS DISPLEJE	36
ULTRAZVUK MAXI HLAVICE - POPIS DISPLEJE	37

OBSAH:

ULTRAZVUK MINI HLAVICE - POPIS HLAVICE	38
ULTRAZVUK MAXI HLAVICE - POPIS HLAVICE	39
ULTRAZVUK - POSTUP POUŽITÍ	40
MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU	41
MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU POPIS DISPLEJE	42
ELEKTROFORÉZA - POPIS HLAVICE	43
ELEKTROFORÉZA - POSTUP POUŽITÍ	44
EMS MIKROPULZY	45
EMS MIKROPULZY - POPIS DISPLEJE	46
EMS PULZY - POPIS APLIKÁTORŮ	47
EMS MIKROPULZY – MASKA NA TVÁŘ	48
EMS PULZY - POSTUP POUŽITÍ	49
NANO HYDRATAČE	50
NANO HYDRATAČE - POPIS DISPLEJE	52
NANO HYDRATAČE - POPIS APLIKÁTORU	53
NANO HYDRATAČE - POSTUP POUŽITÍ	54
METODA APLIKACE OBLIČEJE KRKU DEKOLTU	55
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	58
MAPA CITLIVOSTI PLETI	59
ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU	60
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	61
ŽIVOTNOST A OPOTŘEBENÍ APLIKAČNÍCH HLAVIC	63
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	64
CERTIFIKACE	64
EU DISTRIBUTOR	64
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	65
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	66

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – estetické přístroje pro domácí péči i profesionální provozy

BeautyRelax je česká značka zaměřená na vývoj a distribuci estetických přístrojů určených pro široké spektrum uživatelů. Od roku 2010 přinášíme řešení, která nacházejí uplatnění jak v domácí péči, tak v kosmetických salonech, wellness centrech a dalších profesionálních provozech. Díky širokému sortimentu si u nás může vybrat každý – od běžných uživatelů hledajících komfortní péči v domácím prostředí až po profesionály, kteří potřebují spolehlivé přístroje pro každodenní práci.

Jeden sortiment, mnoho možností využití

Přístroje BeautyRelax jsou navrženy s ohledem na různé úrovně zkušeností i rozdílné nároky na provoz. Nabídka zahrnuje jednodušší modely vhodné pro domácí použití i technicky pokročilejší zařízení určená pro profesionální prostředí.

Použité technologie vycházejí z běžně využívaných postupů v oblasti estetické péče, například:

- Radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud

Každý produkt je určen k používání v souladu s návodem výrobce a platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Pro domácí uživatele

Pro jednotlivce, kteří preferují péči v pohodlí domova, nabízí BeautyRelax přístroje:

- s jednoduchým ovládáním
- určené pro pravidelné osobní použití
- umožňující přizpůsobit péči individuálním potřebám

Domácí přístroje jsou navrženy tak, aby se mohly stát součástí běžné rutiny péče o pleť, tělo nebo vlasy.

Pro salony a profesionální provozy

Pro kosmetická studia, salony a wellness zařízení je v nabídce řada přístrojů:

- vhodných pro častější provoz
- s širšími možnostmi nastavení
- určených pro profesionální použití

Profesionální uživatelé mohou vybírat zařízení podle zaměření provozu, typu poskytovaných služeb a individuálních preferencí.

Přehled kategorií přístrojů

- **Kosmetické přístroje** – určené k péči o vzhled a komfort pleti
- **Přístroje pro péči o tělo** – zaměřené na estetickou péči o postavu
- **Masážní přístroje** – vhodné pro relaxaci a regeneraci
- **IPL přístroje** – určené k dlouhodobému omezení růstu chloupků při pravidelném používání

Výběr konkrétního přístroje vždy závisí na individuálních potřebách, zkušenostech uživatele a způsobu použití.

Každý si vybere to své

Ať už hledáte přístroj pro osobní péči doma, nebo zařízení pro profesionální salon, BeautyRelax nabízí široké spektrum možností. Díky rozmanité nabídce modelů, rozdílným technickým parametrům a různým úrovním obsluhy si u nás najde řešení každý uživatel. Rádi vám pomůžeme s výběrem přístroje, který bude odpovídat vašim požadavkům i plánovanému využití.

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za projevenou důvěru při zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte všechny informace uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte výstrahám a bezpečnostním upozorněním a používejte přístroj výhradně v souladu s uvedenými pokyny. Dodržování těchto zásad přispěje k maximálnímu využití všech funkcí přístroje, k jeho dlouhé životnosti a především k ochraně vašeho zdraví. V tomto návodu se vám pokusíme co nejpečlivěji přiblížit použité technologie a doporučený způsob používání přístroje. Veškeré instrukce berte prosím s plnou vážností. Estetický přístroj **BeautyRelax** pracuje s moderními technologiemi, které jsou bezbolestné a bezpečné. Přístroj prošel dlouhodobým vývojem a splňuje veškeré zákonem stanovené bezpečnostní normy. Pro dosažení vysoké efektivity aplikace pracuje s určitým výkonem, přičemž jeho konstrukce, vlastnosti i použité technologie jsou navrženy tak, aby bylo používání přístroje maximálně bezpečné, efektivní a uživatelsky přívětivé.

Úvodní důležité informace k přístroji a jeho používání

- Estetický přístroj **BeautyRelax** spadá do kategorie estetických a masážních přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek** a neslouží k léčbě žádných kožních onemocnění. Nabízí technologie, které při použití za stanovených podmínek napomáhají ke zlepšení kondice a vzhledu pleti prostřednictvím různých metod aplikace. Konstrukce přístroje je navržena tak, aby odolala i náročnému provozu při častém, včetně komerčního, používání.
- Přístroj umožňuje **neinvasivní aplikaci**, což znamená, že žádná část aplikační hlavičky fyzicky neproniká pod povrch kůže.
- Neinvasivní charakter použití je základním předpokladem šetrnosti k pleti. Z hlediska odborné způsobilosti obsluhy je však vždy nutné respektovat aktuálně platnou legislativu v zemi, kde je přístroj používán. Jednotlivé státy mohou mít pro konkrétní technologie odlišná pravidla. Provoz studia je vždy nutné těmto nařízením přizpůsobit.
- Estetický přístroj **BeautyRelax** je certifikován a splňuje všechny normy požadované pro přístroje tohoto typu. Bezpečnost všech elektronických součástí je zajištěna.
- Každá technologie, kterou přístroj nabízí, umožňuje individuální nastavení intenzity. Pokud je přístroj používán pro komerční účely, doporučujeme, aby si obsluha nejprve vyzkoušela účinky jednotlivých aplikačních hlavic sama na sobě. Získá tak lepší představu o působení technologií při různých úrovních výkonu.
- Při použití aplikačních hlavic **není nutné vždy volit nejvyšší stupeň výkonu**. Intenzitu je třeba nastavit tak, aby bylo působení technologie na pleti zřetelně vnímatelné, avšak nikdy nepřekračovalo hranici komfortu nebo bolesti.
- Neplatí zásada, že častější používání přístroje vede k rychlejším výsledkům. Dopřejte svému tělu dostatek času na zpracování energie uvolněné během aplikace. Tím významně přispějete k ochraně svého zdraví. Po aplikaci pleť vždy dostatečně hydratujte běžně dostupnými kosmetickými přípravky, čímž podpoříte její regeneraci.
- V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností nebo pochybností ohledně používání přístroje se na nás neváhejte obrátit.
- Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese **mh@santadria.cz**, kde je vám k dispozici náš produktový manažer **Martin Hrbek**, který vám rád poskytne odbornou pomoc.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze, seznamte se se všemi vyobrazeními a dokumentaci si uschovejte pro případné pozdější použití. Instalaci a uvedení přístroje do provozu provádějte výhradně podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Pokud je vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Nejste-li si jisti, zda je váš zdravotní stav slučitelný s používáním přístroje, doporučujeme vhodnost použití konzultovat se svým praktickým lékařem nebo dermatologem.
- Používá-li přístroj více osob, je nutné dbát zvýšené pozornosti na dodržování hygienických zásad. Po každém použití důkladně dezinfikujte kontaktní části aplikační hlavice dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu.
- Pokud je přístroj poškozen, nefunguje správně nebo došlo k jeho pádu do vody, **nikdy jej neuvádějte do provozu**.
- V případě mechanického poškození se nedotýkejte vnitřních částí přístroje, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj spadne na zem, může dojít k jeho vnitřnímu poškození. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na servisní oddělení nebo autorizovaného prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny, sprchy, bazény apod.
- Přístroj **není omyvatelný**. Žádná jeho část nesmí být ponořena do vody ani čištěna pod proudem tekoucí vody.
- Nikdy nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Po každém použití jej vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí, vyčkejte před jeho zapnutím alespoň **3 hodiny**, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje.
- Přístroj není určen pro používání dětmi ani osobami, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti neumožňují jeho bezpečné používání bez dozoru.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna, otevřený oheň apod.
- Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat, upravovat nebo opravovat. Veškeré servisní zásahy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Přístroj skladujte v suchém a čistém prostředí. Chraňte jej před prachem a nečistotami.
- Během provozu přístroj nijak nezakrývejte, zejména nezakrývejte ventilační otvory a mřížku ventilátoru, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám.
- Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v rozporu s tímto návodem k obsluze nebo platnými právními předpisy. Tím není dotčena odpovědnost za vady výrobku dle platné legislativy.
- Veškeré účinky popsané v tomto návodu mají výhradně kosmetický charakter. Přístroj nenahrazuje lékařskou diagnostiku ani léčbu a není určen k řešení zdravotních obtíží.

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT



Použití přístroje **BeautyRelax** není vhodné nebo je **zakázáno** v následujících případech:

Zdravotní omezení

- Těhotenství a období kojení
- Kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické přístroje
- Kovové implantáty v oblasti obličeje, krku nebo dekoltu (šrouby, destičky, výplně, zubní implantáty v blízkosti aplikované oblasti)
- Epilepsie
- Onkologické onemocnění (aktivní nebo v léčbě)
- Závažná onemocnění srdce a cév
- Poruchy krevní srážlivosti
- Autoimunitní onemocnění v aktivní fázi
- Horečnaté a infekční stavy
- Neurologická onemocnění spojená se sníženou citlivostí pokožky

Kožní omezení

- Otevřené rány, čerstvé jizvy, popáleniny
- Akutní záněty kůže, ekzém, lupénka v aktivní fázi
- Silné akné, hnisavé nebo zanícené projevy
- Infekční kožní onemocnění (bakteriální, virové, plísňové)
- Aktivní opar (herpes)
- Silné podráždění, alergická reakce nebo spálená pokožka
- Po čerstvých estetických zákrocích
(botox, výplně, chemický peeling, laser, mezoterapie – minimálně 2–4 týdny dle typu zákroku)

Další omezení použití

- Nepoužívat na očích, na očních víčkách, štítné žlázy a genitálií
- Nepoužívat při snížené schopnosti vnímat teplo nebo bolest
- Nepoužívat na poraněnou pokožku
- Nepoužívat pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

Důležité upozornění

V případě jakýchkoliv pochybností, chronického onemocnění nebo dlouhodobé léčby doporučujeme konzultaci s lékařem před použitím přístroje. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické použití a nenahrazuje lékařskou péči.

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE

- Obličej
- Krk
- Dekolt

HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE

- Podpora přirozené pružnosti a svěžího vzhledu pleti.
- Vizuální vyhlazení vzhledu výrazných a hlubších vrásek.
- Intenzivní péče a výživa pokožky.
- Okamžitý pocit hydratace a osvěžení pleti.
- Šetrné odstranění zbytků make-upu a nečistot z povrchu pokožky a pórů.
- Hlubkové čištění pleti s redukcí viditelnosti černých teček.
- Uvolnění a vyčištění kožních pórů.
- Péče o pleť se sklony k nedokonalostem.
- Mechanická stimulace a masáž pokožky.

POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Sonogel kombinujte s aplikační hlavici pro radiofrekvenci a EMS.



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vodní dermabrazé (hydrodermabrazé) pro kosmetické čištění povrchu pleti
- Diamantová mikrodermabrazé pro mechanickou exfoliaci pokožky
- Ultrazvuková špachtle pro šetrné povrchové čištění
- Technologie plasmových toků pro kosmetickou práci s povrchem pokožky
- Radiofrekvence Twin Ball pro kosmetickou stimulaci pokožky
- Ultrazvuková mini hlavice
- Ultrazvuková maxi hlavice
- Mezoterapie elektroforézou pro podporu vstřebávání kosmetických přípravků
- EMS mikropulzy pro kosmetickou stimulaci pokožky
- Nano hydratační funkce pro aplikaci hydratačních přípravků
- 7" velký barevný dotykový displej
- Radiofrekvence: 1 MHz
- Maximální teplota radiofrekvence: 42 °C
- Rozsah výkonu vakuového nasávání: 0–80 kPa
- Rozsah působení plazmové technologie: 16–112 Hz
- Frekvence ultrazvuku: 1 MHz
- EMS pulzy: 1,3 µA až 3,5 µA
- Napájení: síťový adaptér 220 V
- Rozměry hlavní jednotky: 40 × 30 × 30 cm
- Příkon: 200 W
- Hmotnost: 12 kg

OBSAH BALENÍ

- Aplikační hlavice s vodní dermabrazí 1x
- Aplikační hlavice s diamantovou mikrodermabrazí 3x
- Vyměnitelné abrazivní korunky 9x
- Aplikační hlavice s ultrazvukovou špachtlí 1x
- Aplikační hlavice s plasma terapií 1x
- Aplikační hlavice s radiofrekvencí Twin Ball 1x
- Aplikační hlavice s ultrazvukem mini 1x
- Aplikační hlavice s ultrazvukem maxi 1x
- Aplikační hlavice s elektroforézou 1x
- Sada kontaktních elektrod pro funkci EMS 1x
- Aplikační hlavice s nano hydratací 1x
- Ochranné textilní brýle 1x
- Sonogel 1x
- Návod k obsluze 1x
- Napájecí kabel 220V 1x
- Prodlužovací napájecí kabel 220V 1x

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


MOŽNOSTI APLIKACE

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojová aplikace pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

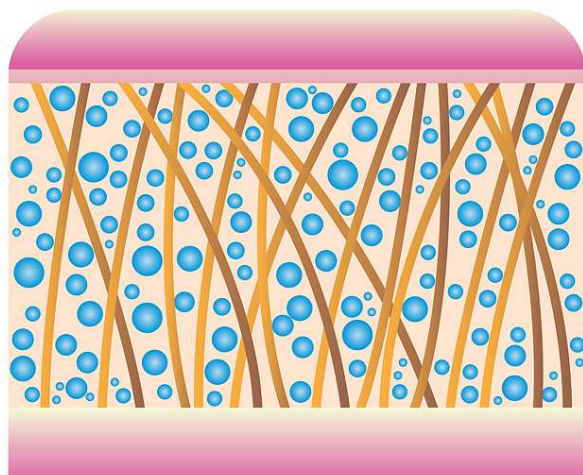

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

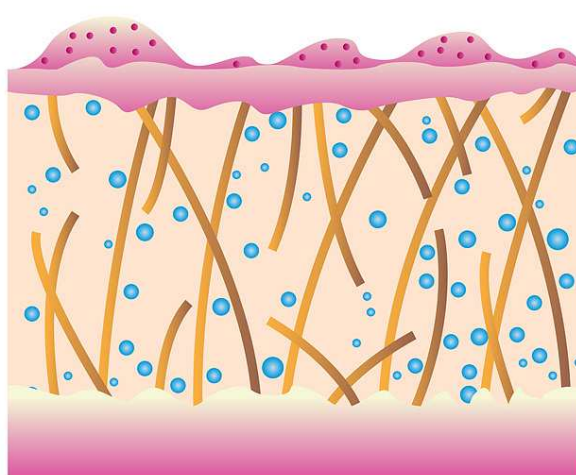

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax AntiAge Oxygen Studio Performance je multifunkční kosmetický přístroj určený pro profesionální použití v kosmetických studiích a salonech. Slouží výhradně ke kosmetickým účelům při péči o pleť v oblasti obličeje, krku a dekoltu. Přístroj umožňuje provádět široké spektrum kosmetických procedur zaměřených na čištění, úpravu vzhledu a podporu celkové kondice pleti. Kombinuje více technologií v jednom zařízení, čímž rozšiřuje možnosti profesionální kosmetické péče.

Pomocí jednotlivých funkcí lze dosáhnout například:

- důkladného kosmetického čištění pleti
- vizuálního zlepšení vzhledu pokožky
- podpory pružnosti a svěžího vzhledu pleti
- pocitu hydratace a komfortu
- zapracování kosmetických přípravků do pokožky
- zklidnění a osvěžení pleti



Přístroj integruje následující kosmetické technologie:

vodní dermabrazé, diamantová mikrodermabrazé, ultrazvuková špachtle, plasmová technologie, radiofrekvence Twin Ball, ultrazvuková mini hlavice, ultrazvuková maxi hlavice, elektroforéza pro aplikaci kosmetických přípravků, EMS mikropulzy, nano hydratační funkce a fotonová technologie. Ovládání probíhá prostřednictvím přehledného velkého dotykového displeje. Moderní konstrukce a design přístroje odpovídají požadavkům profesionálního provozu.

Přístroj není zdravotnickým prostředkem a je určen výhradně pro kosmetické použití.

Poznámka: vybrané technologie jsou řešeny doplňkem sady.

Fotonová terapie: model [BR-2924]

Čištění pleti ultrazvukem: model [BR-1530]

Diamantová mikrodermabrazé: model [BR-2210]

POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC [TECHNOLOGIÍ]

1. VODNÍ DERMABRAZE
2. DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRAZE
3. ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE
4. TERAPIE PLASMOVÝMI TOKY
5. RADIOFREKVENCE TWIN BALL
6. ULTRAZVUK MINI HLAVICE
7. ULTRAZVUK MAXI HLAVICE
8. MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU
9. EMS MIKROPULZY
10. NANO HYDRATACE
11. FOTONOVÁ TERAPIE



POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice s plazmovou terapií
2. Aplikační hlavice s ultrazvukem maxi hlavice
3. Aplikační hlavice s mezoterapií elektroforézou
4. Aplikační hlavice s nano hydratací
5. Aplikační hlavice s radiofrekvencí
6. Aplikační hlavice s vodní dermabrazí
7. Aplikační hlavice s ultrazvukem mini hlavice
8. Tlačítko **ON/OFF**
9. Barevný dotykový displej
10. Tlačítko nastavení intenzity podtlaku
11. Tlačítko nastavení množství dávkování vody



POPIS PŘÍSTROJE

1. Zásobník na vodu
2. Zásobník na vodu
3. Zásobník na vodu



POPIS PŘÍSTROJE

1. Držák na aplikační hlavice
2. Zásobník na odpadní vodu
3. Zdířka pro připojení nabíjecího kabelu
4. Aplikační hlavice s plazmovou terapií
5. Aplikační hlavice s ultrazvukem maxi hlavice
6. Aplikační hlavice s mezoterapií elektroforézou
7. Aplikační hlavice s nano hydratací
8. Aplikační hlavice s radiofrekvencí
9. Aplikační hlavice s vodní dermabrazí
10. Aplikační hlavice s ultrazvukem mini hlavice
11. Konektor pro kabely EMS




INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Všechny části přístroje zbavte obalového materiálu.
2. Upevněte na zadní stranu hlavní jednotky držák na aplikační hlavice.
3. Hlavní jednotku umístěte na rovnou, suchou a plochu. Doporučujeme vybrat takové místo, které je blízko elektrické zásuvky.
4. Hlavní jednotku přístroje připojte k napájecímu adaptéru. Jeden konec připojte do zdířky na zadní straně přístroje. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické sítě 220V.
5. Připojte všechny aplikační hlavice.
6. Pokud se rozhodnete vyměnit aplikační hlavici, přístroj musí být vždy vypnutý.
7. Při umístění hlavní jednotky berte ohled na vzdálenost k hlavě klienta/uživatele. V průběhu použití by neměly být kabely aplikačních hlavic příliš napnuté.
8. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka **ON/OFF** na horní straně přístroje. Zapnutí přístroje doprovází zapnutí displeje. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

*Konektory aplikačních hlavic mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky na zadní straně přístroje je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. Neplatí pro hlavice s vodní dermabrazí a nano hydratací. **Zašroubování prstence provedte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.***

**Utažení
prstence
zašroubováním**

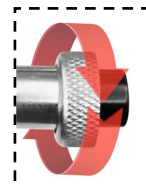

VODNÍ DERMABRAZE



Aplikační hlavice a systém vodní cirkulace

Aplikační hlavice je speciálně navržena tak, aby zajišťovala **plynulé a rovnoměrné dávkování tekutiny** během celé aplikace. Tekutina je kontinuálně přečerpávána z nádržky s čistou vodou do aplikační hlavice a následně odváděna do odpadní nádoby. Během aplikace tekutina **okamžitě hydratuje pleť** a zároveň na sebe váže nečistoty, bakterie, kožní maz i další kožní rezidua. Nasátá tekutina společně s uvolněnými nečistotami je následně bezpečně odváděna do odpadní nádoby. Při plném kontaktu aplikátoru s pleť nedochází k nežádoucímu ztékání tekutiny po pokožce, což zajišťuje komfortní a čistý průběh aplikace. K dispozici jsou **vyměnitelné aplikační nástavce různých průměrů**, které umožňují efektivní aplikace jak větších ploch (tváře, čelo), tak i menších a citlivých oblastí (nos, okolí úst nebo očí).

Systém vakuového nasávání

Systém vakuového nasávání umožňuje **hloubkové a zároveň šetrné čištění pleti**. Estetický přístroj BeautyRelax efektivně napomáhá k odstranění černých teček, drobných pupínků a dalších nedokonalostí pleti. Během aplikace dochází k jemnému nasátí pokožky do aplikační hlavice, přičemž speciálně tvarovaná hrana aplikátoru mechanicky odstraňuje povrchové nečistoty, černé tečky i nevzhledné bílé čepičky. Díky této technologii se stává **ruční vymačkávání**, které často způsobuje výrazné zarudnutí, podráždění a riziko vzniku jizviček, zbytečným. Současně dochází ke **zjemnění povrchových pigmentových skvrn**, vyčištění a uvolnění kožních pórů a celkovému zlepšení struktury pleti. Přístroj je vysoce účinný, ale zároveň maximálně šetrný i k citlivější pokožce.

Hlavní pokyny pro práci s technologií vodní dermabraze

1. Příprava pleti je zásadní

- Pleť musí být **důkladně odlíčena a „nahrubo“ očištěna** od make-upu, krémů a viditelných nečistot. Na pleti nesmí zůstat větší mechanické částice, které by mohly být nasáty do systému a způsobit **ucpání hadiček nebo vnitřních částí přístroje**.
- Před zahájením aplikace by měla být pleť **čistá a bez silné vrstvy mastnoty**.

2. Správná práce s hlavicí

- Po přiložení hlavice k pleti **vyčkejte několik sekund**, než dojde k opětovnému načerpání vody ze zásobníku.
- Provádějte **dlouhé, pomalé a plynulé tahy** bez častého přerušování kontaktu s pletí.
- Udržujte hlavici **v plném kontaktu s pokožkou**, aby nedocházelo k nežádoucímu ztékání vody. Vyvarujte se rychlých, trhavých pohybů.

3. Nastavení vakua a průtoku vody

- Výkon vakua i množství vody nastavujte **postupně**.
- Vody nesmí být příliš málo (snižuje účinnost), ani příliš mnoho (může stékat po pleti).
- Intenzitu vždy přizpůsobte **citlivosti pleti a aplikované oblasti**.

4. Volba správného nástavce

- Používejte **vhodný průměr aplikační hlavice** podle velikosti aplikované plochy.
- Menší nástavce jsou vhodné pro nos, okolí úst a detailní práci, větší pro tvář, čelo, krk a dekolt.

5. Délka a četnost aplikace

- Jedna oblast by neměla být aplikována **opakovaně nebo příliš dlouho**, aby nedošlo k podráždění pleti.
- Doporučuje se postupovat systematicky a jednotlivé partie **nepřetěžovat**.
- Mezi aplikacemi stejné oblasti dodržujte dostatečný časový odstup.

6. Hygiena a údržba

- Po každém použití důkladně **vyčistěte a dezinfikujte aplikační hlavici**.
- Pravidelně kontrolujte **stav zásobníku s čistou vodou a odpadní nádobku**.

7. Opatrnost

- Nepoužívejte na **otevřené rány, aktivní záněty, silné akné nebo velmi citlivou pokožku**.
- Vždy sledujte reakce pleti – nadměrné zarudnutí nebo diskomfort jsou signálem ke snížení výkonu nebo ukončení aplikace.

8. Závěrečná péče

- Po aplikaci doporučte **hydratační, zklidňující nebo regenerační přípravky**.
- Ideální je zakončit aplikaci **chladovou terapií** pro stažení pórů a zklidnění pleti.

Důležité upozornění před použitím vodní dermabraze

Před zahájením aplikace je **nezbytné, aby byla pleť důkladně odlíčena a „nahrubo“ očištěna** od make-upu, krémů, mastnoty a viditelných nečistot. V případě, že není pleť předem dostatečně očištěna, může při vakuovém nasávání dojít k nasátí **větších mechanických částic**, zbytků make-upu nebo nečistot. Tyto částice mohou způsobit **ucpání systému vodní cirkulace**, a to jak v hadičkách (kabelech), tak i ve vnitřních částech hlavní jednotky přístroje. Nedostatečná příprava pleti tak může vést ke snížení účinnosti aplikace, poruše funkce přístroje nebo jeho trvalému poškození. Z tohoto důvodu je **předčištění pleti vždy nezbytným krokem**, který nelze vynechat.

Doporučený postup při vodní dermabrazii

Při použití vodní dermabraze je nutné **po přiložení aplikační hlavice k pleti vždy vyčkat několik sekund**, než dojde k opětovnému načerpání vody ze zásobníku. Tento proces je přirozenou součástí funkce systému vodní cirkulace. Z tohoto důvodu je ideální provádět **dlouhé, plynulé a pomalé tahy**, při nichž zůstává aplikační hlavice **co nejdéle v nepřerušeném kontaktu s pletí**. Takový způsob pohybu zajišťuje rovnoměrné dávkování tekutiny, maximální účinnost čištění a zároveň zvyšuje komfort během aplikace. Rychlé nebo přerušované pohyby mohou snížit efektivitu aplikace a narušit plynulý průběh vodní dermabraze.


VODNÍ DERMABRAZE - POPIS DISPLEJE



1. NASTAVENÍ ČASU
2. NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY
3. TEPLOTA VODY
4. NASTAVENÍ ÚROVNĚ TEPLoty VODY
5. PŘEPNUTÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU
6. START/STOP

VODNÍ DERMABRAZE - POPIS HLAVICE

1. **VYMĚNITELNÁ APLIKAČNÍ HLAVICE**
2. **SVĚTELNÝ INDIKÁTOR**
3. **TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE**

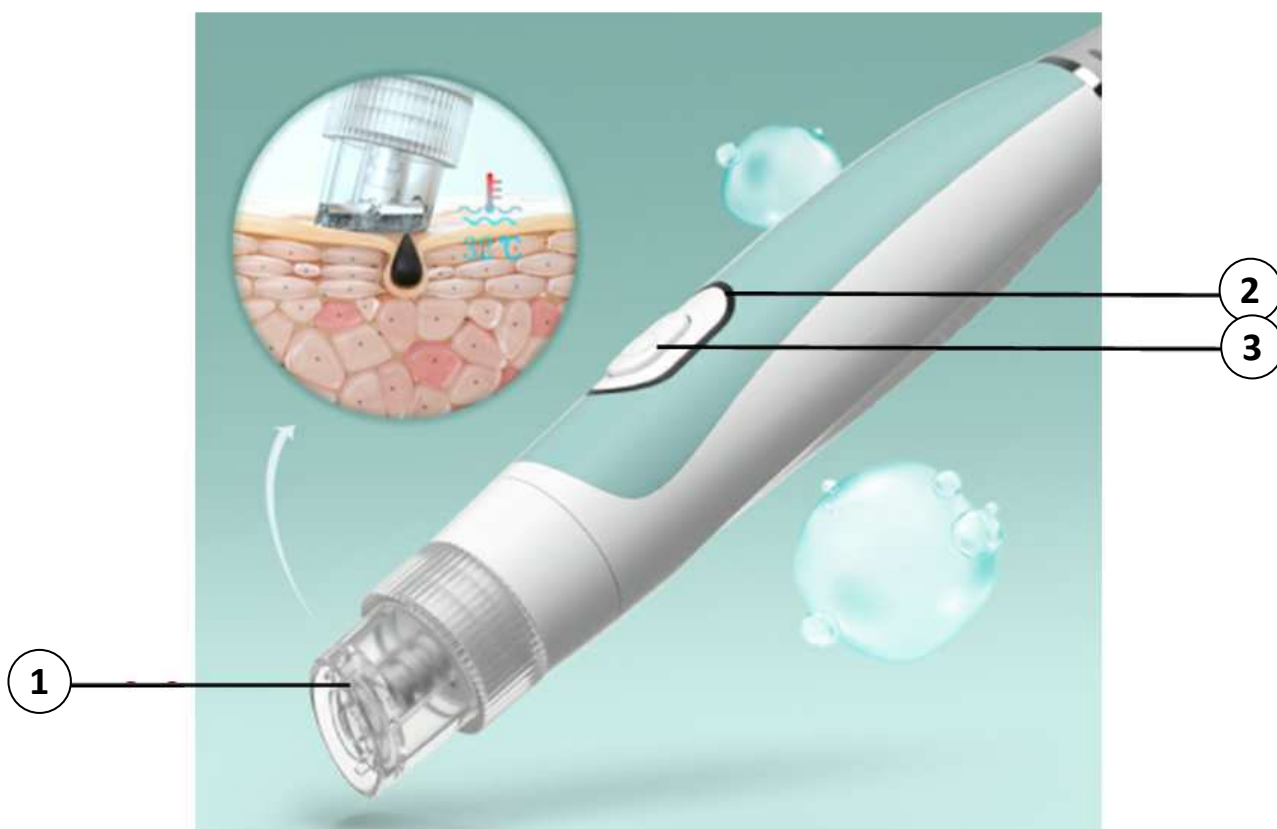

VODNÍ DERMABRAZE - POSTUP POUŽITÍ

- Pro použití funkce vodní dermabraze stiskněte příslušné tlačítko v menu přístroje.
- Zásobníky na tekutinu naplňte. Použijte výhradně destilovanou nebo kojeneckou vodu. Voda nesmí obsahovat vodní kámen, který by mechanicky poškodil přístroj. Stejně tak do zásobníku na tekutinu nepřimíchejte další látky. Mohlo by dojít k poškození přístroje a ztrátě záruky.
- Vyberte některý z vyměnitelných aplikátorů. Mají různý průměr velikosti. Zvolte takový, který nejvíce vyhovuje aplikace části pleti a reliéfu povrchu pokožky.
- V menu funkce vodní dermabraze si můžete nastavit čas aplikace **(1)** pomocí šipek. Nastavený čas a zbývajíc čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Funkci vodní dermabraze můžete aktivovat stisknutím tlačítka **START (6)**. Stejným tlačítkem můžete činnost přístroje přerušit. Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Pomocí levého otočného tlačítka si můžete nastavit zvýšení vakuového nasávání.
- Pomocí pravého otočného tlačítka si můžete nastavit množství vody, které má v aplikační hlavici cirkulovat.



- Hlavici se po pleti pohybujte krátkými táhlými pohyby. Druhou rukou si můžete pleť udržovat napnutou.
- Pro funkci vodní dermabraze je vždy třeba kontrolovat zásobníky na vodu. Na pravé straně přístroje jsou integrované 3 zásobníky. Pomocí tlačítka na displeji (5) si můžete přepínat mezi jednotlivými zásobníky. Zásobníky na tekutinu musí být pro správné fungování systému dostatečně naplněny. Odpadní nádobku na zadní straně přístroje pravidelně vyprazdňujte.
- **Množství vody (pomocí otočného tlačítka na pravé straně)**, které je do aplikační hlavice přečerpáváno. Nastavte si takovou hodnotu, která bude poskytovat dostatečné množství tekutiny. Na druhé straně bude mít hlavice dostatečný výkon pro plynulé odsávání tekutiny. V průběhu práce s aplikační hlavici by neměla tekutina příliš stékat po povrchu pleti.
- **Síla podtlaku (nastavení tlačítka na displeji na levé straně)**, která se generuje v aplikační hlavici. Pohyb aplikační hlavice po pleti by měl být intenzivní. Na straně druhé by neměl být příliš silný, což by bránilo plynulému pohybu aplikátoru po pleti. Sílu podtlaku by měla vždy korespondovat s množstvím přečerpávané tekutiny.
- Pomocí aplikační hlavice se vždy snažte pokrýt celou plochu obličeje. Na částech pleti se zvýšenou citlivostí upravte výkon působení vakua. Po celou dobu použití by vám měla být aplikace příjemná. Není přesně stanoven čas použití. Čas je v přímé úměře s tím, jak detailně se potřebujete na vyčištění pleti zaměřit.
- Mějte na paměti, že působením vakua může pokožka zarudnout. Čím větší sílu vakuové terapie použijete, tím

PLASMA



Kosmetická péče zaměřená na podporu svěžího a vyváženého vzhledu pleti

S přibývajícím věkem dochází k postupným změnám vlastností a celkového vzhledu pleti. Epidermis se postupně ztenčuje, produkce kolagenu se zpomaluje a pleť ztrácí svou přirozenou pružnost a pevnost. Pigmentové skvrny se stávají viditelnějšími, kontury obličeje ochabují a vrásky se prohlubují. Tyto procesy jsou přirozenou součástí stárnutí, jejich průběh je však možné výrazně ovlivnit. Technologie plazmového toku s obsahem aktivního kyslíku představuje moderní kosmetickou metodu péče o pleť se zaměřením na její celkový vzhled.

Prevence místo řešení následků

Většina kosmetických technologií se zaměřuje především na **odstraňování následků** – například eliminaci vrásek vzniklých vlivem stárnutí, odstranění černých teček jako důsledku zanedbaného čištění pleti nebo uvolnění ucpaných pórů způsobených zvýšenou tvorbou kožního mazu.

Plazmová aplikace s ozonem k péči o pleť přistupuje z opačného konce. Funguje jako **účinná prevence vzniku nežádoucích kožních defektů**, podporuje zdravé prostředí pleti a pomáhá udržovat její rovnováhu ještě před tím, než se problémy plně projeví.

Princip fungování technologie

Keramická plocha aplikační hlavičky generuje **stejnoseměrný proud s vysokofrekvenčním napětím**, který vytváří plazmový výboj mezi aplikátorem a povrchem pleti. Tento výboj vzniká využitím atomů kyslíku přirozeně obsažených ve vzduchu. Vzniklá plazma přispívá k udržení čistého prostředí na povrchu pokožky. Aplikace přispívá k udržení čistého prostředí na povrchu pokožky v rámci kosmetické péče. Optimální vzdálenost mezi aplikátorem a pletí je přibližně **4 mm** (případně v letmém dotyku pleti), což zajišťuje maximální účinnost a zároveň bezpečnost aplikace. Součástí balení jsou **dvě vyměnitelné aplikační hlavičky**, určené pro aplikaci větších ploch i menších, hůře dostupných partií obličeje.

Důležité upozornění před aplikací plazmového toku s ozonem


Před zahájením aplikace je **nezbytné, aby byla pleť důkladně vyčištěna a zcela vysušena**. Odstranění veškerých nečistot, zbytků make-upu, kožního mazu i vlhkosti z povrchu pleti výrazně přispívá k **maximální efektivitě technologie** a zároveň ke zvýšení **komfortu klienta během aplikace**. Aplikace plazmového toku na vlhkou nebo nedostatečně vyčištěnou pleť může snížit účinnost plazmového výboje, ovlivnit jeho stabilitu a zhoršit celkový pocit z aplikace. Správná příprava pleti je proto klíčovým krokem, který nelze vynechat.

PLASMA POPIS DISPLEJE

1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY*
4. *START/STOP*

PLASMA - POPIS HLAVICE

1. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
2. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE

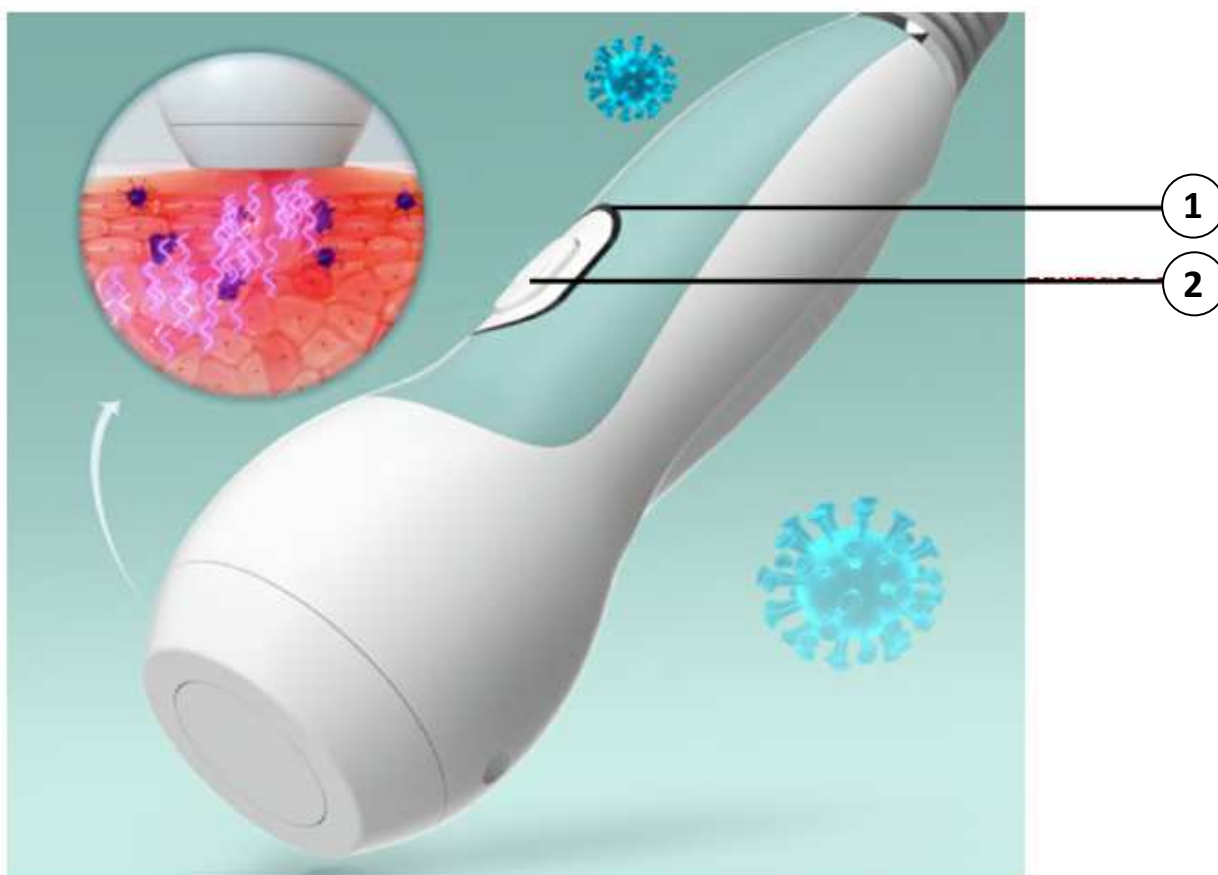

Než začnete používat plazmovou terapii

Před samotnou aplikací přístroje je nutné **pleť důkladně zbavit mastnoty, make-upu a veškerých nečistot**. Po odlíčení vyčkejte, dokud pleť **zcela neuschne** – na pokožce se před použitím plazmové terapie nesmí nacházet žádné stopy vlhkosti.

Před prvním použitím doporučujeme provést **test snášenlivosti**, například na předloktí. Po aplikaci vyčkejte přibližně **1 hodinu** a sledujte, zda pokožka nevykazuje nežádoucí reakce (zarudnutí, pálení, podráždění).

Důležitá upozornění před prvním použitím

- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte silnými ekzémy, otevřenými ranami nebo jiným závažným kožním onemocněním.
- Aplikační hlavici nikdy netlačte na pleť nadměrnou silou.
- Po aplikaci doporučujeme použít vyživující masku, sérum, krém nebo noční krém.
- Po aplikaci obličeje vyčkejte, až se pleť mírně zklidní, a teprve poté aplikujte make-up dle potřeby.

Optimální postup aplikace plazmovou terapií

- Proveďte důkladné odlíčení pleti běžným způsobem. V případě potřeby můžete využít hlavici s vodní dermabrazí. Na pleti nesmí zůstat žádné zbytky make-upu ani jiné nečistoty, které by snižovaly účinnost plazmových toků.
- Před aplikací musí být pleť **zcela suchá**.
- Sundejte veškeré kovové doplňky, jako jsou náušnice, náhrdelníky, prsteny či náramky.
- Použijte aplikační hlavici určenou pro plazmové toky.
- Pohybujte se aplikační hlavici **pomalou a plynule** po pleti. Plazmový výboj vzniká při optimální vzdálenosti aplikátoru od pokožky. Keramický aplikátor by se měl pohybovat ve vzdálenosti přibližně **1–4 mm** od pleti. Snažte se, aby byl přímý kontakt aplikátoru s pletí co nejkratší nebo žádný.
- Aplikace je **bezbolestná**. Během aplikace můžete zaznamenat jemné aroma, které je přirozeným doprovodným jevem působení plazmového toku.
- V aplikované oblasti může dojít k mírnému zarudnutí pleti. Jedná se o běžnou a přechodnou reakci, která obvykle odezní během několika minut.
- Aplikační hlavice se nesmí během použití dostat do kontaktu s žádným kovovým předmětem.
- V průběhu aplikace **nepoužívejte žádné kosmetické přípravky**.
- Zaměřte se především na vybrané partie obličeje, krku nebo dekoltu, kde požadujete nejvýraznější účinek.
- Po dokončení aplikace naneste na pleť vhodný kosmetický přípravek – krém, sérum nebo masku – pro podporu regenerace a hydratace.

PLASMA - POSTUP POUŽITÍ

- Pro použití funkce plazmových toků zvolte v hlavní nabídce příslušný obrázek aplikační hlavice.
- Pomocí tlačítek **(1)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek **(3)** si můžete nastavit intenzitu plazmových toků.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji na nápisem **ENERGY**.
- Zvolte si takovou intenzitu působení plazmových toků, které vám budou na pleti stále příjemné a nebudou přesahovat hranici bolesti.
- Pomocí tlačítka **(4)** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Aplikace postupně celou plochu obličeje, krku nebo dekoltu. Na velmi citlivých oblastech obličeje, kde je velmi vysoká citlivost upravte úroveň výkonu tak, aby vám použití bylo maximálně příjemné.
- Aplikace plazmovými toky trvá v rozsahu od 2 do 5 minut. Snažte se vždy plynule pokrýt celou plochu pleti obličeje, krku nebo dekoltu.

RADIOFREKVENCE



Radiofrekvence – neinvazivní lifting pleti

Radiofrekvence patří v oblasti estetické péče mezi **nejúčinnější metody neinvazivního liftingu pleti**. Aplikční hlavice přenáší do pokožky radiofrekvenční vlny o přesně definované frekvenci, které jsou optimalizovány tak, aby v hlubších vrstvách pleti vytvářely **řízený tepelný gradient**.

Tento proces cíleně ovlivňuje struktury ve vrstvě dermis, kde dochází k **aktivaci remodelace kolagenových a elastických vláken**. Dodaná energie kosmeticky podporuje procesy v pokožce, které souvisejí s její pevností, pružností a celkovým vzhledem.

Během aplikace je na pleti vnímán **příjemný pocit tepla**, který je přirozeným průvodním jevem působení radiofrekvenční energie. Díky schopnosti přesného zacílení proniká radiofrekvence efektivně i do oblastí s výraznější tukovou vrstvou, kde dochází k excitaci metabolických procesů a podpoře pevnějšího a vypnutějšího vzhledu pleti.

Výsledkem může být opticky vyhlazenější vzhled kontur obličeje a celkově pevnější a vypnutější dojem pleti.

Intenzitu výkonu lze **plynule regulovat**, což umožňuje bezpečné a komfortní použití i u pleti s rozdílnou mírou citlivosti.


RADIOFREKVENCE - POPIS DISPLEJE



1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY*
4. *NASTAVENÍ MÓDU RADIOFREKVENCE (A,B,C)*
5. *START/STOP*

RADIOFREKVENCE - POPIS HLAVICE

1. *SVĚTELNÝ INDIKÁTOR*
2. *TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE*

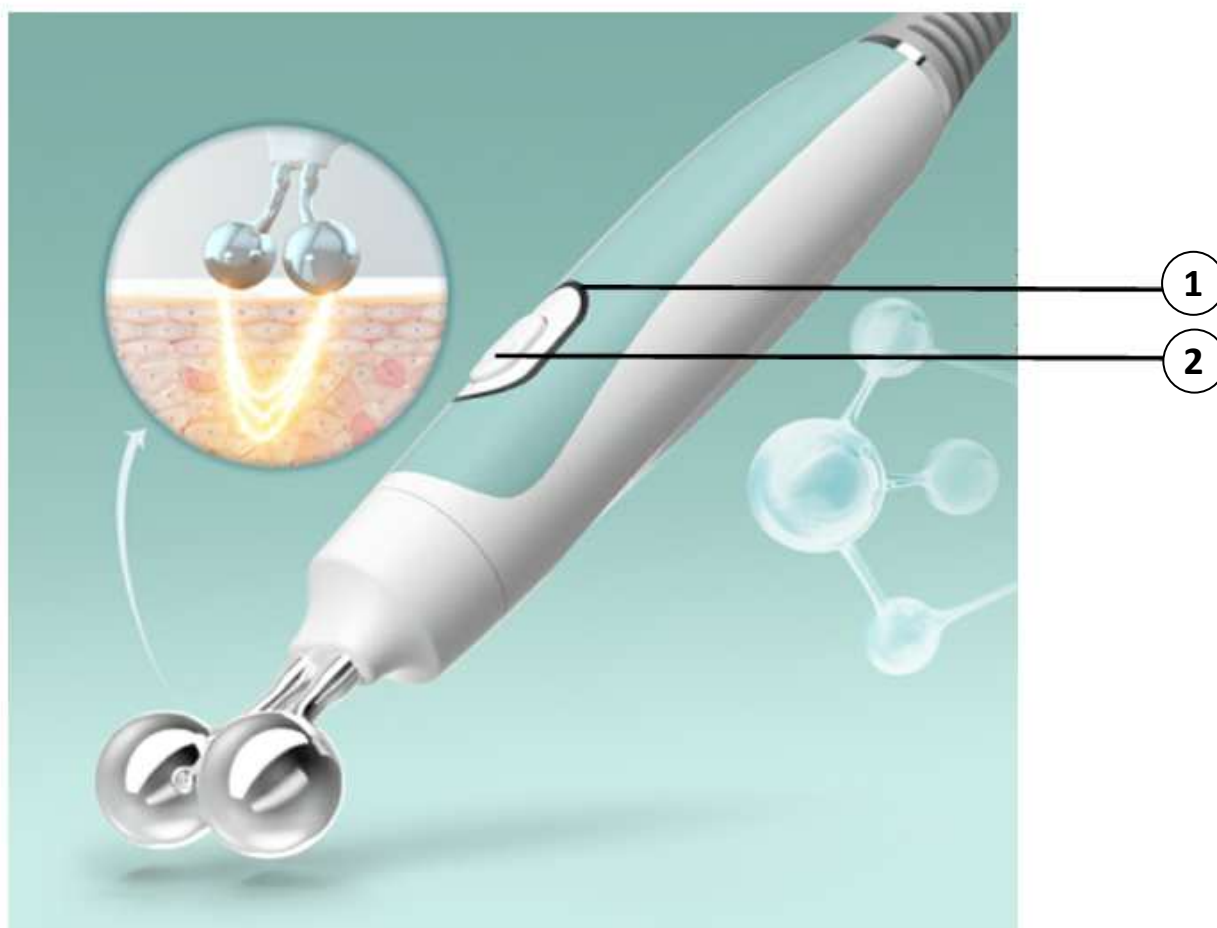

RADIOFREKVENCE - POSTUP POUŽITÍ

- Pro použití funkce radiofrekvence zvolte v hlavní nabídce obrázek příslušné aplikační hlavice.
- Pomocí tlačítek na levé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvenčních vln.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji u tlačítek změny intenzity.
- Pomocí tlačítek **A B C** si můžete volit mód působení radiofrekvence. K dispozici jsou 3 módy. Na displeji jsou zobrazeny jako písmena **A, B, C**. Každý mód má specifický režim fungování radiofrekvence. Na výběr je stále působení radiofrekvenčních vln nebo přerušované.
- Zvolte si takovou intenzitu působení radiofrekvence, která vám bude na pleti stále příjemná.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Délka aplikace by se měla pohybovat v rozsahu od 10 do 12 minut v závislosti na velikosti plochy pleti při použití hlavice.

POZNÁMKY K POUŽITÍ RADIOFREKVENCE

1. Pokud se rozhodnete pro aplikaci přístrojem větší části obličeje, krku nebo dekoltu, doporučujeme nanášet sonogel po částech. Přestože má kontaktní gel skvělé hydratační schopnosti, může po nějakém čase postupně vysychat.
2. V průběhu použití se snažte, aby byly obě kuličky v kontaktu s pletí.
3. Pokud je vám působení radiofrekvence na konkrétním místě na pleti nepříjemné i při nejnižší úrovni intenzity, snižte množství sonogelu, zkraťte čas kontaktu aplikační hlavice s pletí nebo se tomuto místu úplně vyhněte.
4. **Upozornění:** Při prvním kontaktu s pletí mějte vždy zapnutou nejnižší úroveň intenzity. Aplikátor přiložte na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již aplikace nepříjemná, nastavte zpět nejnižší úroveň nebo aplikaci ukončete.
5. **Tip:** Partie použití by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Radiofrekvence bude mít lepší možnost navázat se na povrch pleti.
6. **Doporučení:** Po aplikaci na pleti nevystavujte v délce několika hodin příliš horké vodě. Pokuste se vyhnout návštěvě sauny. Pokožka prochází po aplikaci stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhýbejte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

CO JE NORMÁLNÍ PO APLIKACI

- zarudnutí (obvykle ustoupí do 1–24 hodin),
- pocit tepla nebo „horké pleti“,
- mírný otok,
- jemná citlivost.

JAK POKOŽKU CO NEJLÉPE ZKLIDNIT

1) Chladit, ale ne ledem přímo

- Použijte **chladivý gelový sáček** nebo **studený obklad** zabalený v látce
- Chladte přibližně 5 až 10 minut v intervalech
- Nepřikládejte led přímo na kůži – může to způsobit podráždění či poškození

2) Nanést zklidňující přípravky

Vhodné jsou:

- **aloe vera gel** (čistý, bez parfemace),
- **panthenol** (např. ve formě pěny nebo krému),
- **termální voda ve spreji**,
- produkty s **niacinamidem** (snižuje zarudnutí),
- lehké **hydratační krémy bez alkoholu a parfemace**.

Vyhněte se:

- aktivním látkám jako **retinol, AHA/BHA kyseliny, vitamín C**,
- parfémovaným nebo mastným krémům.

3) Vyhnout se teplu 24–48 hodin

To znamená:

- sauna
- solárium
- horké sprchy
- intenzivní sportování (zvýšení teploty a pocení prodlouží zarudnutí)
- přímé slunce

4) Neškrábat a nedráždit pokožku

- Nemačkejte, nedrhňte, nepoužívejte peelingy.
- Pleť ponechejte v klidu.

5) Použít SPF

- Pokud jdete ven, naneste **SPF 30–50**, i když je zataženo.
- Pleť je po radiofrekvenci citlivější na UV záření.
- Běžné reakce odezní během **několika hodin až jednoho dne**.
- Citlivé pleti to může být **až 48 hodin**.

ULTRAZVUK - MAXI & MINI HLAVICE

Aplikátor vyrobený z ušlechtilé oceli po přiložení k pokožce přenáší energii o předem nastaveném výkonu a frekvenci. Tato energie je určena výhradně pro **kosmetické účely** a působí na povrchové a podpovrchové vrstvy pokožky v rámci běžné kosmetické péče.

Technologie umožňuje cílenou aplikaci energie i v oblastech s vyšší vrstvou podkožní tkáně. Dochází k tepelnému působení, které může podpořit přirozené procesy pokožky a přispět ke zlepšení jejího vzhledu, tonusu a celkové vizuální kondice.

Použití přístroje může napomoci:

- ke zlepšení vzhledu ochablých kontur,
- k podpoře pevnějšího a sjednocenějšího vzhledu pleti,
- k optimalizaci zpracování kosmetických přípravků do pokožky.

Nejedná se o zdravotnický prostředek ani o prostředek určený k diagnostice, terapii či prevenci onemocnění. Přístroj je určen výhradně pro profesionální kosmetické použití.

Typy aplikátorů

Mini aplikátor

Vhodný pro precizní práci v menších a citlivějších partiích, zejména v oblasti očního okolí.

Maxi aplikátor

Určen pro aplikaci na větší plochy, jako je obličej, krk a dekolt.

Bezpečnost a použití

Zařízení je navrženo pro použití vyškoleným personálem v oblasti kosmetických služeb. Parametry energie jsou nastavitelné podle typu pokožky a konkrétní kosmetické procedury v rámci běžné estetické péče.

Všechny deklarované účinky se vztahují výhradně k podpoře kosmetického vzhledu pokožky a individuální výsledky se mohou lišit.


ANTIAGE
OXYGENSTUDIO
PERFORMANCE
POWERED BY
beautyrelax

BR-3040



ULTRAZVUK mini aplikátor
OŠETŘENÍ OČNÍHO OKOLÍ - POTLAČENÍ TMAVÝCH KRUHŮ POD OČIMA

6

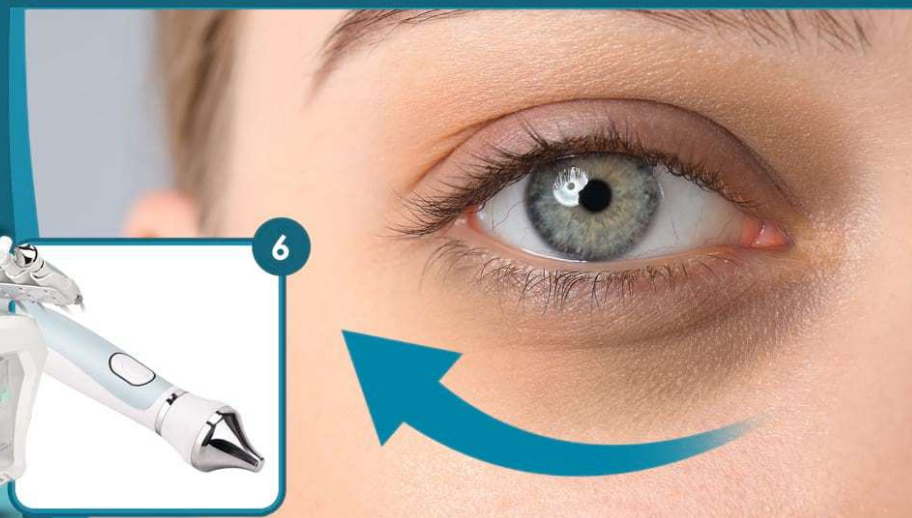

ANTIAGE
OXYGENSTUDIO
PERFORMANCE
POWERED BY
beautyrelax

BR-3040



ULTRAZVUK maxi aplikátor
INTENZIVNÍ ZAPRACOVÁNÍ KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO PLETI

7



ULTRAZVUK MINI HLAVICE - POPIS DISPLEJE



1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY*
4. *NASTAVENÍ MÓDU ULTRAZVUKU*
5. *START/STOP*


ULTRAZVUK MAXI HLAVICE - POPIS DISPLEJE



1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY*
4. *NASTAVENÍ MÓDU ULTRAZVUKU*
5. *START/STOP*


ULTRAZVUK MINI HLAVICE - POPIS HLAVICE

1. *SVĚTELNÝ INDIKÁTOR*
2. *TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE*

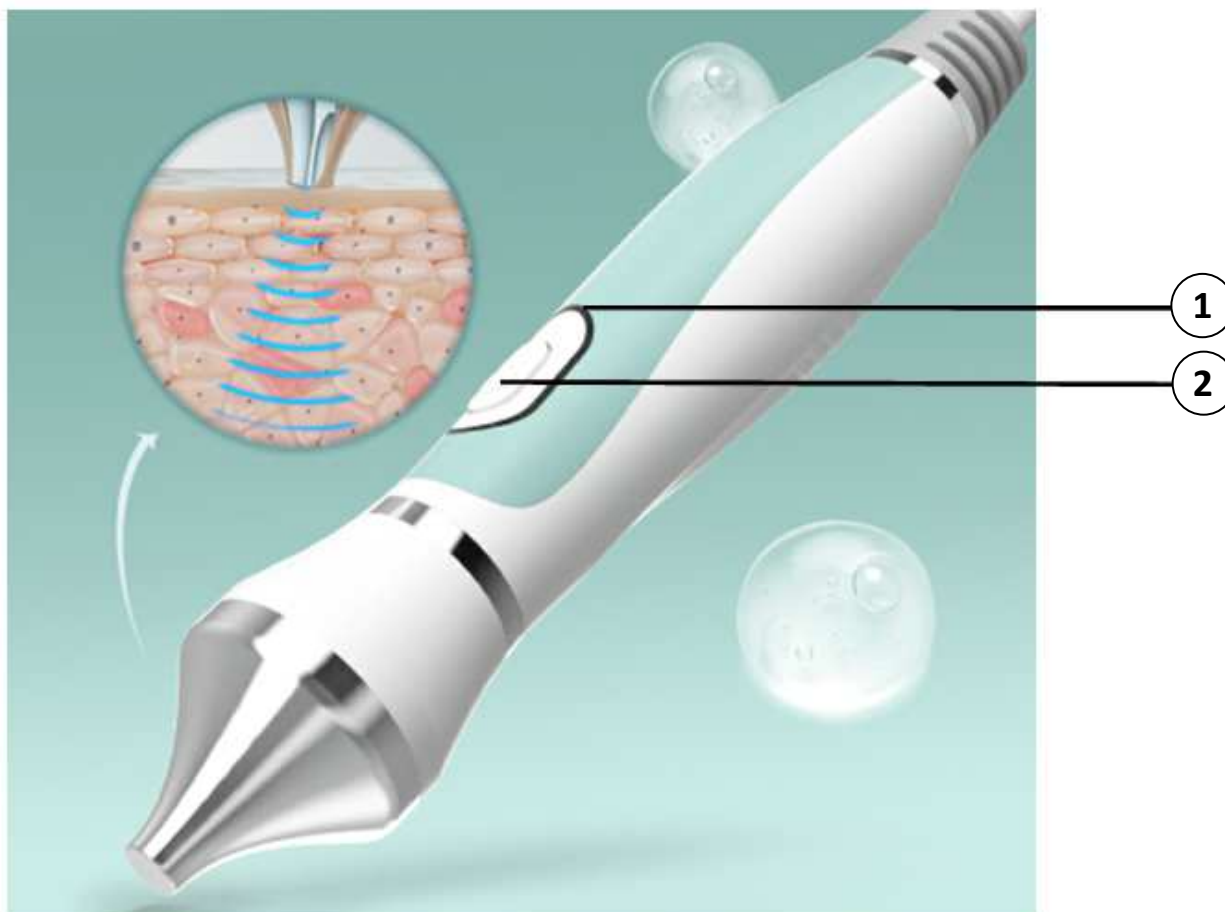

ULTRAZVUK MAXI HLAVICE - POPIS HLAVICE

- 1. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR**
- 2. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE**

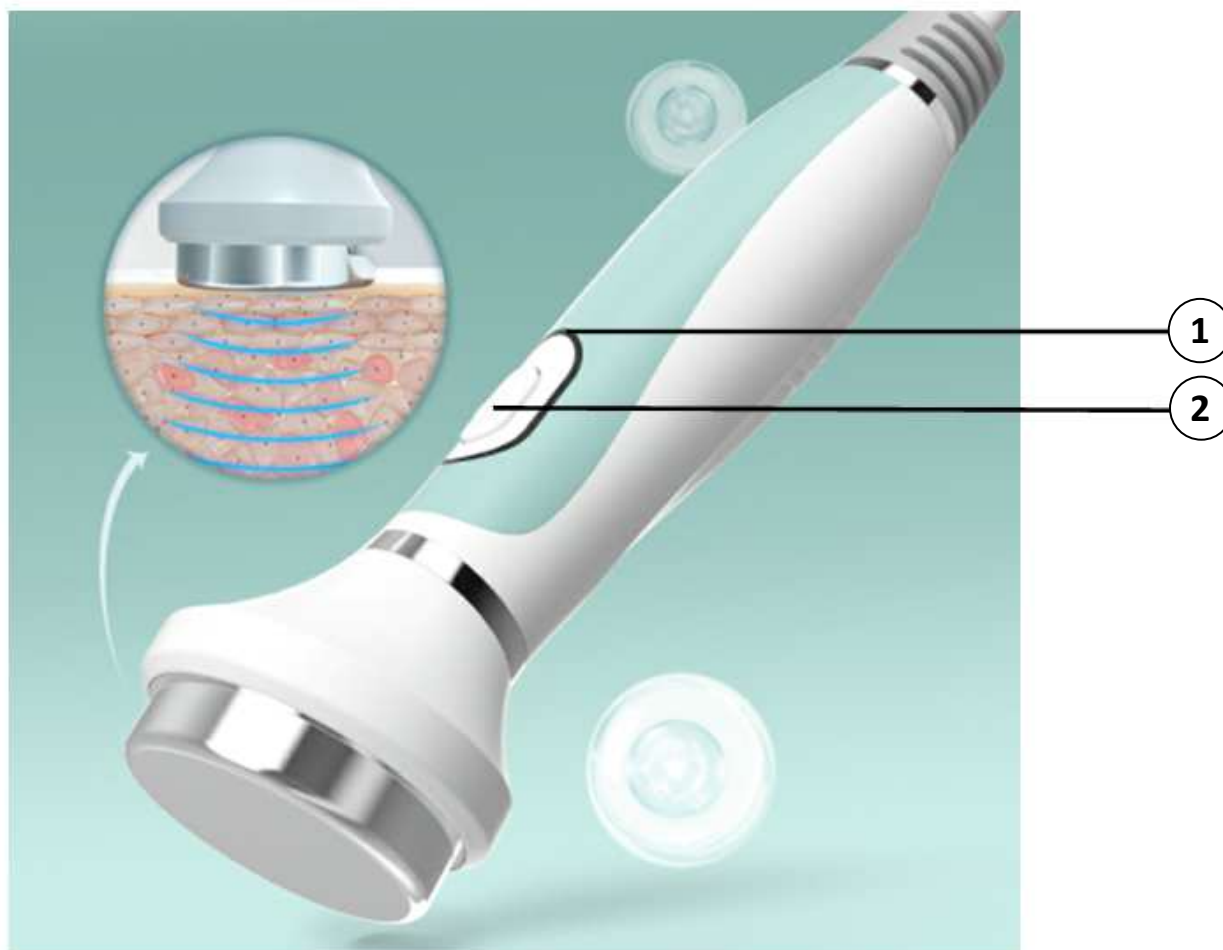

ULTRAZVUK - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci ultrazvuku snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka v hlavní nabídce.
- Pomocí tlačítek **(3)** si můžete nastavit intenzitu působení ultrazvuku. Hodnota úrovně intenzity je zobrazena na nápisem **ENERGY**. Zvolte si intenzitu, kdy můžete na pleti vnímat působení ultrazvuku, ale na druhou stranu je vám použití stále příjemné. Průvodní jev působení ultrazvukových vln je pocit mravenčení.
- Pomocí tlačítek **(1)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítka **MODE (4)** si můžete nastavit režim působení ultrazvuku. Kontinuální a přerušovaný. Pro efektivní použití doporučujeme používat kontinuální režim.
- Při použití se vždy snažte, aby byl povrch aplikační hlavice v plném kontaktu s pletí.
- Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny se tak mohou na pleť důkladně navázat.
- Můžete také samozřejmě použít vámi oblíbený kosmetický krém, gel nebo sérum. Ultrazvukové vlny významným způsobem napomáhají k zapracování účinných látek.
- Podle účelu použití použijte aplikační hlavici. Pro menší oblasti – například kolem očí, použijte MINI aplikátor. Pro větší plochy – čelo, tváře, bradu, atd. použijte maxi aplikátor.
- Pomocí tlačítka **(5)** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Aplikace ultrazvukem trvá v rozsahu od 2 do 5 minut. Snažte se vždy plynule pokrýt celou plochu pleti obličeje, krku nebo dekoltu.

MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU

Aplikační hlavice pracuje na principu elektroforézy a je určena výhradně pro kosmetické použití. Kosmetické přípravky na tekuté bázi jsou aplikovány na povrch pokožky za podpory jemného mikroproudu v optimalizované frekvenci. Použití je neinvazivní – žádná část hlavice nenarušuje povrch pokožky. Procedura je navržena tak, aby byla komfortní a šetrná. Technologie podporuje zapracování kosmetických roztoků, včetně přípravků s obsahem přírodních extraktů a vitamínů, do povrchových vrstev pokožky. Intenzitu výkonu lze snadno nastavit dle potřeby. Aplikační hlavice je vybavena integrovaným zásobníkem pro opakované naplnění tekutým kosmetickým přípravkem, což umožňuje praktické a hygienické použití.

Metoda představuje neinvazivní alternativu v oblasti profesionální kosmetické péče bez mechanického narušení pokožky.

Zařízení je určeno výhradně pro kosmetické účely a není zdravotnickým prostředkem.



MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU


POPIS DISPLEJE



1. *NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÍ VODY Z AMPULKY*
2. *NASTAVENÍ ČASU*
3. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
4. *NASTAVENÍ INTENZITY*
5. *NASTAVENÍ MÓDU MEZOTERAPIE*
6. *START/STOP*

ELEKTROFORÉZA - POPIS HLAVICE

1. *VÝSTUP TEKUTINY Z AMPULKY*
2. *AMPULKA NA TEKUTINU*
3. *SVĚTELNÝ INDIKÁTOR*
4. *START/STOP FUNKCE*

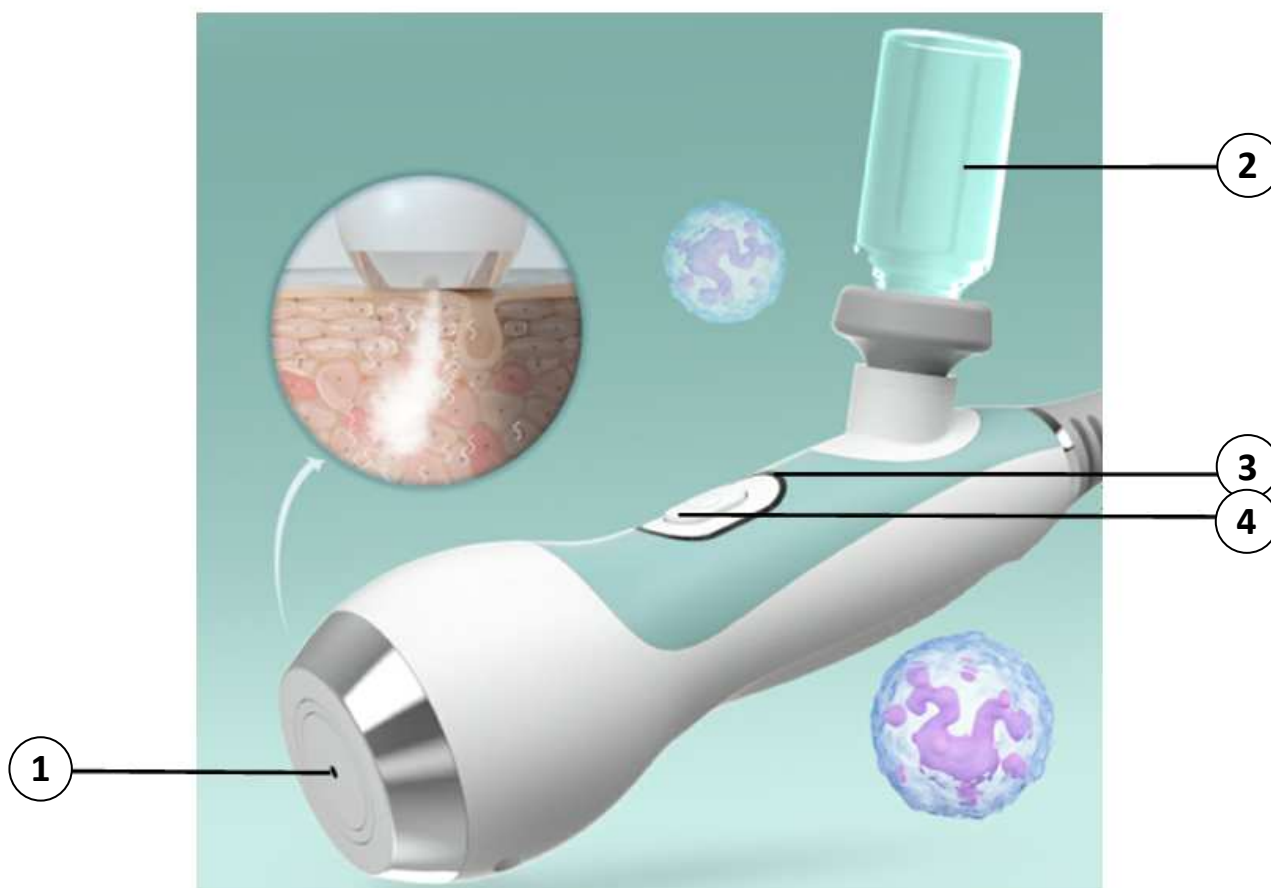

ELEKTROFORÉZA - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci elektroforézy snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Aplikační hlavici je vhodné použít pro zpracování tuhých kosmetických přípravků (krémů, gelů, past).
- Pro tekuté přípravky použijte ampulku. Přípravky na tuhé bázi naneste přímo na pleť.
- Působení elektroforézy můžete vnímat jako pocit mírného brnění na pleti.
- Pomocí tlačítek **ENERGY (4)** si můžete nastavit působení intenzity elektroforézy. Zvolte si intenzitu, která vám bude na pleti příjemná.
- Pomocí tlačítek **(2)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek **WATER (1)** si můžete nastavit množství tekutiny, které je na pleť čerpána z ampulky. Ampulku je možné vždy naplnit pouze přípravky na tekuté bázi. Pokud použijete přípravky na tuhé, gelové nebo olejové bázi, dojde k poškození čerpadla a ztratě záruky.
- Pomocí tlačítek **A B C (5)** si můžete nastavit program působení elektroforézy. Nastavte si program, který je vám na pleti nejvíce příjemný. Hlavním smyslem programů je změna působení režimu působení elektroforézy.
- Pomocí tlačítka **(6)** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Aplikace ultrazvukem trvá v rozsahu od 2 do 5 minut. Snažte se vždy plynule pokrýt celou plochu pleti obličeje, krku nebo dekoltu.

EMS MIKROPULZY

Technologie EMS (Electrical Muscle Stimulation) je v tomto přístroji využívána výhradně pro kosmetické účely. Princip spočívá v přenosu jemných elektrických impulzů prostřednictvím speciální obličejové masky připojené k systému čtyř konektorů. Impulzy působí na povrchové svalové partie v oblasti obličeje a vyvolávají jejich rytmickou stimulaci. Tato stimulace napodobuje přirozenou svalovou aktivitu. V rámci kosmetické péče může EMS přispět k podpoře tonusu obličejových svalů a k vizuálnímu zvýraznění kontur obličeje. Intenzitu impulzů lze nastavit dle individuálních preferencí a komfortu.

Technologie je neinvazivní a určena výhradně pro profesionální kosmetické použití.



EMS MIKROPULZY - POPIS DISPLEJE



1. VOLBA MASÁŽNÍHO PROGRAMU (**MODE**) A,B,C
2. NASTAVENÍ ČASU
3. NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY
4. NASTAVENÍ INTENZITY
5. START/STOP

EMS PULZY - POPIS APLIKÁTORŮ

1. SVORKA S KLADNOU POLARITOU (ČERVENÁ)
2. SVORKA SE ZÁPORNOU POLARITOU (ČERNÁ)



EMS MIKROPULZY – MASKA NA TVÁŘ

Kabely pro funkci **EMS** jsou kompatibilní se všemi **obličejovými maskami**, které je možné běžně zakoupit. Masky je vždy jednorázová.

Masku stačí připojit pomocí 4 konektorů.

Na displeji zvolit program a nastavit parametry masáže.

	GARNIER Skin Naturals Hydra...	65 Kč	Alza.cz	+ doprava za 9...	★★★★★ (453)	Krém	Z webu Klarna
	GARNIER Skin Naturals...	76 Kč	Alza.cz	+ doprava za 9...	★★★★★ (220)	Krém - Obličej - Maska	Z webu Klarna
	GARNIER Skin Naturals Hydra...	65 Kč	Alza.cz	+ doprava za 9...	★★★★★ (172)	Gel	Z webu Klarna
	GARNIER Skin Naturals Hydra...	65 Kč	Alza.cz	+ doprava za 9...	★★★★★ (75)	Krém	Z webu Klarna
	GARNIER Skin Naturals Hydra...	59 Kč	Alza.cz	+ doprava za 9...	★★★★★ (203)	Krém - Obličej - Maska	Z webu Klarna
	GARNIER Skin Naturals...	68 Kč	Alza.cz	+ doprava za 9...	★★★★★ (52)	Gel	Z webu Klarna
	GARNIER Skin Naturals Vitami...	68 Kč	Alza.cz	+ doprava za 9...	★★★★★ (412)	Krém - Obličej - Maska	Z webu Klarna
	GARNIER Skin Naturals Hydra...	65 Kč	Alza.cz	+ doprava za 9...	★★★★★ (29)		Z webu Klarna

EMS PULZY - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci EMS pulzů snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Použití této funkce je spojeno s obličejovou vyživující maskou, která je běžně k zakoupení v drogerii (nejoblíbenější klienty jsou např. od značky Garnier).
- Obličejová maska je určena k jednorázovému použití.
- K masce připojte elektrické svorky. Svorky můžete také k masce připojit k masce po částech. Nejprve 4 svorky v horní části tváře, poté přesuňte 4 svorky na střední část tváře a naposledy přesuňte 4 svorky do spodní části tváře. EMS pulzy tak budou pracovat na tváři s ještě větší intenzitou.
- Pomocí tlačítek **ENERGY (4)** si můžete nastavit působení intenzity EMS pulzů. Zvolte si intenzitu, která vám bude na pleti příjemná. Aktuálně nastavená intenzita je zobrazena nad symbolem **ENERGY**.
- Pomocí tlačítek **(2)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek **MODE** si můžete nastavit režim působení EMS pulzů. K dispozici jsou 3 programy: **A B C**. Každý program má individuální přednastavenou frekvenci působení EMS pulzů. Zvolte si takový program, který vám nejvíce vyhovuje.
- Pokud se s přístrojem teprve seznamujete, vždy začínajte na nejnižší intenzitě č. 1. Přidávejte postupně. Tak, aby pro vás byla aplikace maximálně komfortní.
- Pomocí tlačítka **(5)** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Aplikace EMS pulzy trvá v rozsahu od 5 do 15 minut. Snažte se vždy masku položit na obličej tak, aby maximálně přiléhala na povrch pleti.

NANO HYDRATAČE



Krásná a zdravá pleť se bez dostatečné hydratace neobejde

Dostatečný příjem tekutin je zásadní pro správné fungování celého organismu, avšak **pleť patří mezi oblasti, na které se často zapomíná**. Krásná a zdravě vyhlížející pleť obsahuje až **80 % vody**. Bez vody se lidské tělo neobejde a její nedostatek se velmi rychle projeví právě na stavu pokožky.

Zejména v letních měsících dochází k intenzivnějšímu vysušování pleti vlivem vyšších teplot, slunečního záření a klimatizace. Pleť s nedostatkem vláhly působí suše, unaveně a opotřebovaně, rychle ztrácí pružnost, je náchylnější ke vzniku vrásek a celkově **rychleji stárne**.

Snížený obsah vody v těle způsobuje dehydrataci všech vrstev pokožky. Ani zvýšený pitný režim však nemusí vždy zajistit dostatečnou hydrataci pleti z vnějšího pohledu. Proto je **cílená vnější hydratace** nezbytnou součástí každodenní péče o pleť.

Princip fungování hydratační nano hlavice

Hydratační nano hlavice představuje **vysoce účinný kosmetický nástroj pro okamžitou hydrataci pleti**. Výrazně zvyšuje účinnost klasických hydratačních přípravků na vodní bázi a během několika sekund dodává pleti potřebnou vlhkost. Je vhodná pro **všechny typy pleti**, včetně citlivé.

Přístroj využívá **atomizér nové generace**, který dopravuje tekutinu ze zásobníku přímo do rozprašovacího mechanismu. Zde dochází k rozštěpení molekul roztoku na **nanočástice**, které jsou následně přeměněny na jemnou mlhovinu.

Velikost vzniklých částic je **menší než samotný kožní pór**, což umožňuje snadné pronikání hydratačního přípravku přes horní vrstvu pleti. Výsledkem je **okamžitá a vysoká úroveň hydratační péče** s viditelným efektem.

Hlavní výhody hydratační nano hlavice

- Atomizér nové generace vytváří **jemnou nano mlhu**
- Molekuly roztoku pronikají přímo do pokožky přes kožní póry
- Okamžitá hydratace pleti během několika sekund

Nevhodné přípravky (riziko ucpání atomizéru!)

Oleje a olejové textury

- Rostlinné oleje, silikonové přípravky, mastná séra
- **Proč?** Oleje se špatně rozprašují a vytvářejí v atomizéru lepkavý film

Husté krémy a gely s pevnými částicemi

- Krémy s fyzikálními UV filtry (oxid zinečnatý, oxid titaničitý)
- Gely s peelingovými nebo abrazivními částicemi

Alkoholové a silně astringentní přípravky

- Přípravky s vysokým obsahem alkoholu
- **Proč?** Alkohol může pleť nadměrně vysušovat a poškodit vnitřní mechanismy nano pistole

Vysoce viskózní látky

- Med, sirupy, neředěné kolagenové gely
- **Proč?** Mohou způsobit tvorbu neprůchodných usazenin a ucpání atomizéru

DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ SPRÁVNÉ VODY

Přístroj je možné plnit pouze **destilovanou** nebo **kojeneckou** vodou. Použití jakékoli jiné vody (např. vodovodní, minerální, perlivé) nebo nevhodných tekutin způsobí nevratné ucpání atomizéru a bude vyžadovat nákladnou výměnu celé hydratační hlavice. Zodpovědnost za takové poškození vzniklé nesprávným použitím nese uživatel.


NANO HYDRATACE - POPIS DISPLEJE



1. NASTAVENÍ ČASU
2. NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY
3. START/STOP FUNKCE

NANO HYDRATACE - POPIS APLIKÁTORU

1. AMPULKA NA TEKUTINU
2. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
3. START/STOP FUNKCE

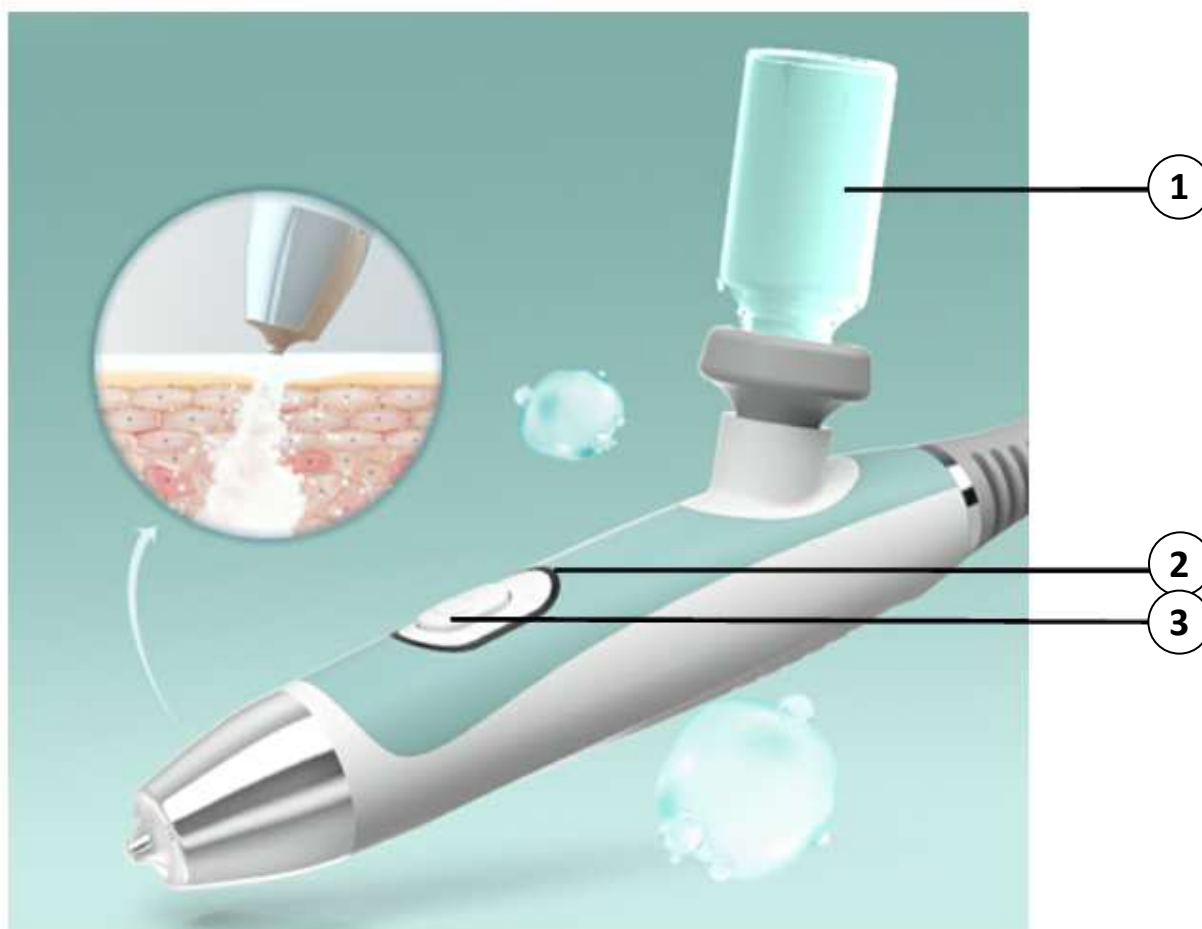

NANO HYDRATACE - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci nano hydrataci snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Pomocí tlačítek **(2)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajíc čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Využijte skleněnou ampulku, která je součástí balení. Naplňte ji tekutinou dle vaše výběru. Ideální je destilovaná nebo kojenecká voda. Pokud použijete jiný přípravek, dojte k ucpaní hlavičky, její poškození a ztrátě záruky.
- Ampulku instalujte do aplikační hlavičky. Vždy držte ampulku hrdlem nahoru. Při instalaci otočte aplikační hlavičku vzhůru nohama, aby mohlo dojít k pevnému spojení hlavičky s ampulkou. Gumová část aplikační hlavičky by měla být v plném kontaktu s ampulkou. Vznikne tak maximální těsnost.
- Při použití držte vždy aplikační hlavičku tak, aby dno ampulky mířilo směrem nahoru.
- Aplikátor hlavičky by neměl být příliš blízko, ale ani daleko od pleti.
- Při delším použití hlavičky s nano hydratací může sražená tekutina na pleti stékat. Otřete případně pomocí hadříku nebo ručníku.
- Pokud na konci použití zbývá v ampulce tekutina, ampulku vyjměte z aplikátoru tak, že dno ampulky směřuje dolů.
- Pomocí tlačítka **(3)** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavičce.
- Aplikační hlavičku použijte tak dlouho, dokud není ampulka prázdná.

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU



METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

1. Čelo

- Pohybuj hlavici **od středu čela směrem do stran k vlasové linii**
- Pohyby jsou **vodorovné, plynulé a lehce tažené ven**
- Postupuj po čele **odspodu nahoru**, aby byla pokryta celá plocha

2. Oblast mezi obočím (kořen nosu)

- Ved' hlavici **od kořene nosu směrem vzhůru ke středu čela**
- Pohyb je **rovný, jemný a tažený nahoru**

3. Nos

- Začni u kořene nosu
- Pohybuj se **směrem dolů po hřbetu nosu**
- Po stranách nosu ved' pohyby **lehce šikmo ven směrem k tvářím**

4. Oční okolí (mimo oční víčka)

- Pohyby ved' **po kostním okraji očnice**, nikdy ne přímo na víčko
- Začni u vnitřního koutku oka
- Pokračuj **obloukovým pohybem směrem ven a lehce nahoru k spánkům**
- Pohyb je **velmi jemný, pomalý a plynulý**

5. Tváře

- Začni u nosu
- Pohybuj hlavici **směrem ven k uším a lehce nahoru**
- Pohyby mohou být:
 - obloukové
 - nebo krátké tahy směrem vzhůru
- Cílem je **podpora liftingového efektu**

6. Oblast nad horním rtem

- Neaplikuj přímo na rty
- Pohybuj hlavici **od středu nad horním rtem směrem šikmo nahoru k nosním křídlům**
- Pohyb je **jemný a krátký**

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

7. Okolí úst

- Začni u koutků úst
- Veď pohyb **směrem ven a lehce nahoru**
- Vyhni se přímému kontaktu se rty
- Pohyby jsou **obloukové, zjemňující mimické linie**

8. Brada a oblast pod bradou

- Na bradě veď pohyby **od středu brady do stran**
- Pod bradou pohybuj hlavici **směrem vzhůru k čelisti**
- Pohyby jsou **tažené nahoru**, podporující zpevnění kontur

9. Krk

- Pohyby veď **od spodní části krku směrem vzhůru k bradě**
- Na stranách krku můžeš vést pohyb **šikmo nahoru**
- Vyhni se silnému tlaku v oblasti štítné žlázy

10. Dekolt

- Začni u středu dekoltu
- Pohybuj hlavici **směrem ven k ramenům**
- Pohyby jsou **široké, plynulé a jemně tažené**

Obecná doporučení


- Pohyby jsou vždy **plynulé, pomalé a kontrolované**
- Netlač, nech hlavici klouzat po pleti

Vždy se snaž pohybovat **směrem nahoru nebo ven**, nikoli dolů

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Se zásobníky na vodu manipulujte vždy pouze při vypnutém přístroji. Používejte výhradně destilovanou nebo kojeneckou vodu bez mechanických nečistot. Voda nesmí obsahovat minerální usazeniny, které by mohly způsobit zanesení systému cirkulace a snížení funkčnosti zařízení. Pravidelně kontrolujte naplnění odpadní nádoby. S vodou manipulujte mimo hlavní jednotku, aby nedošlo k jejímu polití.
- 2.** Do ampule aplikační hlavice s funkcí elektroforézy lze k vodě přidat malé množství tekutého kosmetického koncentrátu (např. sérum, kyselina hyaluronová, vitamínový roztok). Přidaný přípravek musí být plně rozpustný ve vodě a nesmí měnit její hustotu ani konzistenci.
- 3.** Do aplikační hlavice s funkcí nano hydratace používejte vždy pouze destilovanou nebo kojeneckou vodu.
- 4.** Přístroj zapnete stisknutím hlavního tlačítka na horní straně jednotky. Po rozsvícení displeje je zařízení v pohotovostním režimu a připraveno k použití.
- 5.** Jednotlivé funkce se ovládají prostřednictvím dotykového barevného displeje. Každou aplikační hlavici lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí příslušné ikony. V jeden okamžik lze používat pouze jednu technologii. Intenzitu nastavujte postupně s ohledem na komfort klienta.
- 6.** U každé aplikační hlavice lze individuálně nastavit dobu použití.
- 7.** Při práci s funkcí vodní dermabrazie nastavte vyvážený poměr mezi množstvím přiváděné vody a výkonem vakuového nasávání tak, aby byla zajištěna plynulá práce bez nadměrného stékání vody po pokožce.
- 8.** Po každém použití očistěte kontaktní části aplikačních hlavic vhodným čisticím prostředkem určeným pro kosmetické nástroje (např. roztokem s obsahem alkoholu). Tím podpoříte hygienický standard provozu.
- 9.** Přístroj lze kdykoliv vypnout pomocí hlavního tlačítka.
- 10.** Pro zachování optimální životnosti zařízení doporučujeme po ukončení práce ponechat přístroj v pohotovostním režimu přibližně 5 minut, aby mohlo dojít k postupnému ochlazení vnitřních komponent.

MAPA CITLIVOSTI PLETI

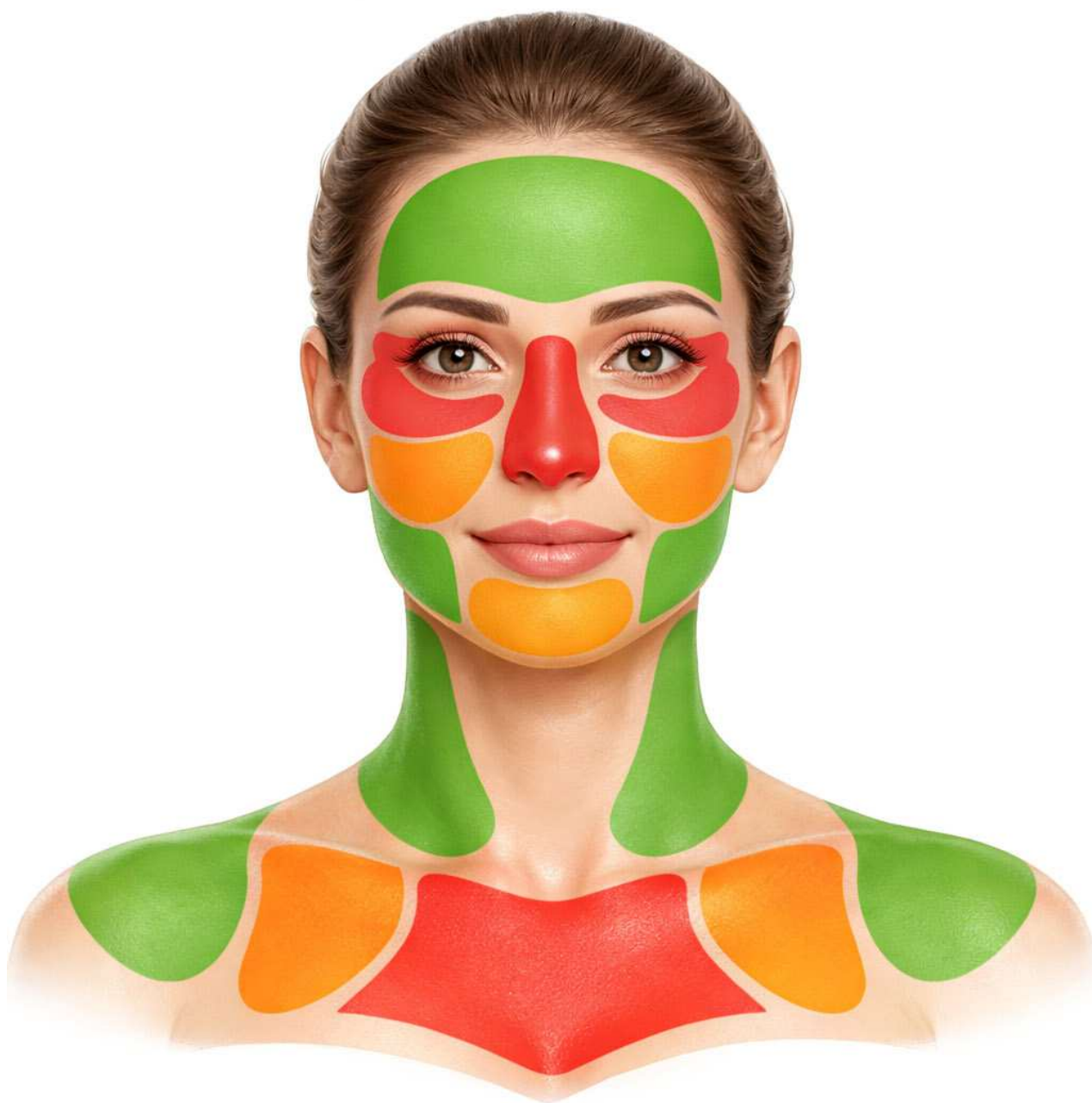

- NÍZKÁ CITLIVOST
- STŘEDNÍ CITLIVOST
- VYSOKÁ CITLIVOST

ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU

1. ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Odstranění sonogelu/nanášeného přípravku.
- Hlavici otřete měkkým, suchým ubrouskem (např. mikrovláknem) nebo vatičkou.
- Pokud je gel zaschlý, můžete použít vlhčený ubrousek bez alkoholu (určený pro elektroniku).

2. DEZINFEKCE (POKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ VÍCE OSOB)

Postup dezinfekce:

- Nastříkejte isopropylalkohol (70–80%) ve spreji na hadřík (NE přímo na hlavici!).
- Jemnými pohyby otřete povrch hlavice.
- Nechte zcela vyschnout (alkohol se rychle odpaří).

Pozor! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (aceton, čpavek, chlor).

3. OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

- Hlavici NENAMÁČEJTE – voda by mohla poškodit elektroniku.
- Po čištění vždy důkladně osušte suchým hadříkem.

4. DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA

- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, aplikujte na kovové části hlavice tenkou vrstvu antiseptického přípravku (např. lékařský alkohol), aby nedošlo k oxidaci.
- Skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

5. UPOZORNĚNÍ

- Neponořujte hlavici do vody ani čisticích roztoků!
- Nepoužívejte abrazivní materiály (kartáče, drátěnky)!
- Nepoužívejte horkou vodu nebo páru!

DOPORUČENÍ PRO PRODLUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

- Čistěte hlavici ihned po použití – zabráníte zasychání gelu.
- Při dezinfekci používejte pouze isopropylalkohol – nepoškozuje materiály.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození (praskliny, koroze).

Doporučujeme použití speciálních dezinfekčních ubrousků, které dezinfikují, ale nejsou napuštěny alkoholem. Poté vždy hlavici důkladně osušte. Došlo by k velmi rychlé degradaci hlavice. Například:

Medwipes dezinfekční vlhčené ubrousky bez alkoholu 100 ks
Čisticí ubrousky - vlhčené, dezinfekční/antibakteriální



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jaké výsledky lze očekávat při použití radiofrekvence?

Reakce pokožky je individuální a může se lišit podle typu pleti, nastavené intenzity a frekvence používání. Bezprostředně po použití může být pokožka přechodně mírně zarudlá. Po aplikaci kontaktního gelu může pleť působit vizuálně svěžím dojmem. V místě aplikace dochází k dočasnému lokálnímu zvýšení teploty povrchu pokožky. Pro zachování vizuálního efektu je vhodné provádět kosmetickou stimulaci opakovaně v přiměřených intervalech (např. 3–4× měsíčně). Při přerušení pravidelného používání se vzhled pokožky postupně vrací do původního stavu. Doporučený minimální rozestup mezi aplikací stejné partie je alespoň 7 dní.

Jak lze působení radiofrekvence vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pokožkou lze vnímat postupně narůstající pocit tepla. Tento vjem je přirozeným průvodním jevem působení radiofrekvenční energie. Intenzitu lze nastavit dle individuální citlivosti a komfortu.

Může dojít k podráždění pokožky?

Při nesprávném nastavení výkonu nebo nevhodné manipulaci může dojít k podráždění pokožky. Z tohoto důvodu je nutné intenzitu nastavovat postupně a přizpůsobit ji typu pleti a aplikované oblasti. Přístroj umožňuje regulaci výkonu pro různé partie obličeje. Při práci je třeba postupovat obezřetně a respektovat individuální citlivost pokožky.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Přístroj není zdravotnickým prostředkem. Jedná se o kosmetické zařízení určené k podpoře vzhledu a kondice pokožky. Není určen k diagnostice, prevenci ani řešení jakýchkoliv kožních onemocnění.

Dochází po aplikaci k omezení běžných aktivit?

Po použití může být pokožka přechodně zarudlá. Tento efekt obvykle během krátké doby odezní. Ve většině případů není nutné omezovat běžné společenské aktivity.

Mohu při použití cítit nepříjemné pocity?

Každá technologie vytváří odlišný pocit na pokožce:

- Radiofrekvence – pocit tepla
- Vodní dermabraze – vjem podtlaku a cirkulace vody
- Plazmová technologie – jemné štípání
- Elektroforéza – mírné brnění

Intenzitu lze upravit tak, aby byl pocit na pokožce v mezích komfortu. Působení by mělo být znatelné, nikoli nepříjemné.

Lze do ampule elektroforézy přidat další látky?

Ano, je možné přidat malé množství tekutého kosmetického přípravku, pokud nedojde ke změně hustoty tekutiny. Přípravek nesmí obsahovat mechanické částice, které by mohly způsobit zanesení systému.

Jak začít s používáním přístroje?

Před prvním použitím si důkladně prostudujte návod k obsluze. Začínajte s nižší intenzitou a kratší dobou aplikace. Postupně si osvojte techniku pohybu aplikační hlavičky a přizpůsobte tempo i výkon individuálním potřebám pokožky.

Proč je důležité hlavičky čistit?

Po každém použití je nutné kontaktní části hlaviček očistit od zbytků gelu nebo přípravků a dezinfikovat vhodným prostředkem (např. na bázi alkoholu). Tím podpoříte hygienický standard provozu. Hlavičky je třeba následně důkladně osušit.

Certifikace

Přístroj splňuje požadavky platné evropské legislativy pro zařízení tohoto typu.

Je přístroj vodotěsný?

Přístroj není vodotěsný. Hlavní jednotka ani většina komponent nejsou určeny k mytí pod tekoucí vodou. Oplachovat lze pouze odnímatelné části určené pro kontakt s vodou (např. zásobníky a vybrané aplikátory) a to výhradně po jejich odpojení od hlavní jednotky.

Zařízení je určeno výhradně pro profesionální kosmetické použití a není zdravotnickým prostředkem.

ŽIVOTNOST A OPOTŘEBENÍ APLIKAČNÍCH HLAVIC

Všechny aplikační hlavice přístroje jsou považovány za spotřební materiál. Při běžném používání dochází v průběhu času k jejich přirozenému opotřebení a postupné degradaci, která je dána mechanickým namáháním, působením energie jednotlivých technologií, kontaktem s pletí, kosmetickými přípravky i pravidelnou dezinfekcí.

Životnost aplikačních hlavice je proto výrazně kratší než životnost hlavní provozní jednotky přístroje a jejich funkčnost může skončit ještě před uplynutím záruční lhůty vztahující se na hlavní set.

Je důležité si uvědomit, že nesprávné používání může proces degradace výrazně urychlit. Mezi nejčastější faktory, které negativně ovlivňují životnost hlavice, patří zejména:

- používání nadměrného výkonu nebo překračování doporučené délky aplikace,
- nedostatečně předčištěné pleti u vodní dermabraze,
- nedostatečné množství kontaktního gelu (u technologií, kde je vyžadován),
- aplikace na nevhodně připravenou pleť (znečištěnou, vlhkou nebo s přítomností kosmetických přípravků),
- používání nevhodných nebo agresivních dezinfekčních prostředků,
- mechanické namáhání, pády nebo nesprávné skladování hlavice.

V důsledku výše uvedených faktorů může dojít ke zhoršení funkčnosti aplikační hlavice, snížení účinnosti aplikace, nepříjemným pocitům při aplikaci nebo k jejímu úplnému selhání.

Z tohoto důvodu je nezbytné dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze, používat aplikační hlavice v souladu s jejich určením a pravidelně kontrolovat jejich stav. Včasná výměna opotřebené hlavice je klíčová nejen pro zachování kvality aplikace, ale také pro bezpečný a spolehlivý provoz přístroje. V případě potřeby kontaktujte prodejce, který má k dispozici kompletní příslušenství.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz

beautyrelax

PO - PÁ 11:00 - 18:00
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma **SANTADRIA s.r.o.**, IČO: 29195454, DIČ: CZ29195454, tímto informuje zákazníka, že výrobek je určen ke **kosmetickému použití** v souladu s návodem k obsluze a **není zdravotnickým prostředkem** ani neslouží k diagnostice, prevenci nebo léčbě jakéhokoli onemocnění.

Prodávající odpovídá za vlastnosti výrobku v rozsahu stanoveném **platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky**, zejména za shodu výrobku s technickými a bezpečnostními požadavky v okamžiku jeho uvedení na trh.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledku:

- používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bezpečnostními pokyny nebo určeným účelem použití,
- neodborného, nevhodného nebo nadměrného používání výrobku,
- používání výrobku osobami, u nichž je jeho použití podle návodu kontraindikováno,
- zásahů do výrobku, jeho úprav, oprav nebo manipulace provedených neoprávněnou osobou,
- používání výrobku v rozporu s platnými právními předpisy v zemi, kde je výrobek používán.

V případě **komerčního používání výrobku** bere zákazník na vědomí, že **odpovědnost za splnění veškerých požadavků vyplývajících z platné legislativy**, zejména v oblasti odborné způsobilosti obsluhy, licencí, povolení nebo jiných zákonných podmínek, **nese výhradně provozovatel** zařízení. Prodávající nenese odpovědnost za právní důsledky vyplývající z komerčního používání výrobku v rozporu s právními předpisy platnými v konkrétní jurisdikci.

Tato doložka **neomezuje ani nevylučuje práva zákazníka**, která mu náleží podle závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele, ani odpovědnost prodávajícího za vady výrobku či škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu, v jakém ji nelze podle práva vyloučit.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Kosmetický přístroj

BeautyRelax ANTIAGE OXYGEN STUDIO PERFORMANCE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-3040**

EAN 8594166123328

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019

Produkt je svým provedením, výkonem a užitnými vlastnostmi vhodný pro komerční účely do masážního nebo kosmetického studia. **Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Teplota působení radiofrekvence 40°C.**

Přístroj nenarušuje integritu pleti. Nabízí neinvazivní aplikaci na pleti. Je určen pro příjemné prohřátí pleti teplem.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.1.2023

The image shows a signature in blue ink over a company stamp. The stamp includes the company name 'SANTADRIA s.r.o.', the address 'Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno', and the identification number 'DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160'.

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel