

NÁVOD K OBSLUZE

Estetický přístroj pro ošetření pleti

BeautyRelax BR-3032

**OXYGEN PROFESSIONAL
CLINIC PERFORMANCE**



OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	4
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	5
UPOZORNĚNÍ	6
POUŽITÍ SONOGELU	6
KONTRAINDIKACE	7
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	7
HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE	7
TECHNICKÉ PARAMETRY	8
OBSAH BALENÍ	8
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	9
METODY REDUKCE VRÁSEK	9
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	10
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC	11
POPIS PŘÍSTROJE	12
SCHÉMA ZAPOJENÍ APLIKAČNÍCH HLAVIC	14
INSTALACE PŘÍSTROJE	16
DOPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU - TEPELNÁ TERAPIE	17
VODNÍ DERMABRAZE	18
PLASMA TERAPIE	21
PRŮNIK PLASMOVÉHO TOKU	22
IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH	23
NEŽ ZAČNETE PLASMA TERAPII POUŽÍVAT	24
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLASMA TERAPIE	24
OPTIMÁLNÍ POSTUP OŠETŘENÍ PLASMOU	24
ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE	26
KYSLÍKOVÁ TERAPIE	29
NANO HYDRATACE	31

OBSAH:

BIPOLÁRNÍ RADIOFREKVENCE PRO OČNÍ OKOLÍ	33
MIKROPROUD	35
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	37
ELEKTROFORÉZA	39
ROBOTICKÁ MEZOTERAPIE	41
TEPELNÁ TERAPIE - PŮSOBENÍ TEPLA A CHLADU	43
RADIOFREKVENCE THERMAGE	45
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	47
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	48
FOTONOVÁ TERAPIE	49
TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM	49
BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE	50
POPIS OVLADAČE MASKY	51
POPIS MASKY	52
POUŽITÍ DLE TYPU PLETI	53
OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÉ MASKY	54
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	55
ČAS OŠETŘENÍ	56
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU	56
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	57
PÁR VĚT ZÁVĚREM	59
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	60
CERTIFIKACE	60
EU DISTRIBUTOR	60
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	61

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Estetický přístroj pro ošetření pleti **BeautyRelax** pracuje s technologiemi, které jsou bezbolestné a bezpečné. Přístroj prošel dlouhým vývojem a splňuje všechny evropské normy, které jsou na přístroj tohoto typu kladeny. Aby bylo možné dosáhnout vysoké efektivity ošetření pleti, pracuje přístroj s určitým výkonem. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny tak, aby působily na pleť s maximální šetrností.

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie estetických přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek.** Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají výrazně zlepšit kondici pleti pomocí různých metod ošetření. Konstrukce přístroje je navržena tak, aby vydržela náročný provoz při komerčním použití s vysokou frekvencí používání.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní ošetření. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky nepronikne pod kůži.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Každá technologie, kterou přístroj nabízí pro ošetření pleti, umožňuje nastavení intenzity. Pokud používáte přístroj pro komerční účely, vždy nejprve vyzkoušejte účinky každé hlavičky sami na sobě, abyste si udělali lepší představu o tom, jak daná technologie působí na pleť při každé úrovni nastavení výkonu.
- Při použití aplikačních hlavic není vždy třeba nastavit nejvyšší stupeň výkonu. Výkon je třeba vždy přizpůsobit tak, aby bylo pleťové ošetření cítit, ale zároveň nepřesáhlo práh bolesti.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví. Pleť po ošetření dostatečně hydratujte běžně dostupnými kosmetickými přípravky. Výrazně tak přispějete k lepšímu průběhu její regenerace.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.
Tým BeautyRelax.cz

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

BEAUTYRELAX OXYGEN PROFESSIONAL CLINIC MAX PERFORMANCE je přístroj, který je určen pro kosmetické ošetření pleti na velmi kvalitní a profesionální úrovni. Přístroj není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Přístroj neposkytuje prostřednictvím aplikačních hlavic žádnou technologii, která by narušila integritu pleti. Nevyužívá žádné jehly. Žádná část z aplikačních hlavic nikdy nepronikne skrz povrch pleti. Přístroj byl vyvinut tak, aby poskytoval základní kosmetická ošetření: vyčištění pleti, hydratace pleti, zapracování kosmetických přípravků, podpora zlepšení kondice pleti, zklidnění pleti. Přístroj působení na pleť celou řadou technologií: vodní cirkulace, ultrazvuk, radiofrekvence, jemné EMS pulzy, světelná terapie.

Rozsah licence pro využívání jednotlivých technologií za účelem komerčního používání je dána zákonem v každé zemi Evropské unie. Ten stanoví, jaká je třeba úroveň erudice pro jednotlivé technologie, které přístroj nabízí. Respektive dosaženou úroveň vzdělání/licence pro přístroj obdobného typu.



Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenesse žádnou odpovědnost za používání přístroje za podmínek , které jsou v rozporu s legislativou v dané zemi používání. Provozovatel může veřejně pro komerční použití pracovat pouze s funkcemi a technologiemi přístroje, na které má oprávnění dle aktuálně platného znění zákona/vyhlášky. Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenesse žádnou odpovědnost za škody, které vznikly v rozporu s používáním podmínek stanovených v tomto

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Instalaci přístroje provádějte podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny. Po každém použití je třeba důkladně dezinfikovat aplikační hlavici roztokem na bázi alkoholu.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Žádná z jeho součástí nesmí být ponořena do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj v průběhu používání žádným způsobem nezakrývejte, zejména mřížku ventilátoru.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- **Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.**
- **Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.**



POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Sonogel kombinujte s aplikační hlavici pro radiofrekvenci, ultrazvuk a mikroproud.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (platí pro konkrétní místo ošetření pleti)
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství

POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Obličej
- Krk
- Dekolt

HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE

- Podpora tvorby kolagenu.
- Remodelace elastických vláken.
- Zvýšení pružnosti pleti.
- Zvýraznění kontur obličeje.
- Vyhlazení výrazných hlubokých vrásek.
- Maximální výživa pleti.
- Okamžitá hydratace pleti.
- Prokrvení a okysličení podkožní tkáň.
- Jemná lymfatická masáž pro redukci otoků obličeje.
- Odstranění velice drobných částíček makeupu, které ulpí v kožních pórech.
- Hlubkový peeling pleti s odstraněním černých teček.
- Uvolnění kožních pórů.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Podpora krevního oběhu.
- Vyrovnání barevného tonusu pleti.
- Mechanická masáž pokožky.
- Potlačení pigmentových skvrn.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Technologie: vodní dermabraze, plasmová terapie, ultrazvuk, nano hydratace, kyslíková terapie, radiofrekvence, mezoterapie, EMS pulzy, mikroproud, fotonová terapie, působení tepla a chladu
- Červené světlo: vlnová délka 630nm
- Modré světlo: vlnová délka 470nm
- Žluté světlo: vlnová délka 590nm
- Zelené světlo: vlnová délka 520nm
- Laserové světlo: 650nm
- Velký dotykový barevný displej 10"
- Radiofrekvence: 1MHz
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry hlavní jednotky: 114x56x66cm
- Hmotnost: 40kg

OBSAH BALENÍ

- Hlavní jednotka 1x
- Aplikační hlavice s vodní dermabrazi 1x
- Aplikační hlavice s plasma terapií 1x
- Aplikační hlavice s ultrazvukovou špachtlí 1x
- Aplikační hlavice s kyslíkovou terapií 1x
- Aplikační hlavice s nano hydratací 1x
- Aplikační hlavice s bipolární radiofrekvencí 1x
- Aplikační hlavice s mikroproudem 2x
- Aplikační hlavice s ultrazvukem 1x
- Aplikační hlavice s elektroforézou 1x
- Aplikační hlavice s robotickou mezoterapií 1x
- Aplikační hlavice s tepelnou terapií 1x
- Aplikační hlavice s radiofrekvencí THERMAGE 1x
- Náhradní aplikátor pro hlavici s robotickou mezoterapií 1x
- Vyměnitelné aplikátory pro vodní dermabrazi 8x
- Vyměnitelné aplikátory pro nano hydrataci 2x
- Vyměnitelné aplikátory pro hlavici s plasma terapií 2x
- Sada náhradních těsnících kroužků 1x
- Externí vodní hadice pro naplnění zásobníku na tepelnou terapii 2x
- Mistička pro zachycení vody ze zásobníku na tepelnou terapii 1x
- Sada náhradních hadříků 1x
- Sada náhradních špuntů pro zakrytí otvorů hlavicí, které pracují s vodou 1x
- Trychtýř 1x
- Obličejová maska s funkcí fotonové terapie 1x
- Ochranné textilní brýle 1x
- Sonogel 1x
- Návod k obsluze 1x
- Napájecí kabel 220V 1x
- Prodlužovací napájecí kabel 220V 1x

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škáry (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojové ošetření pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

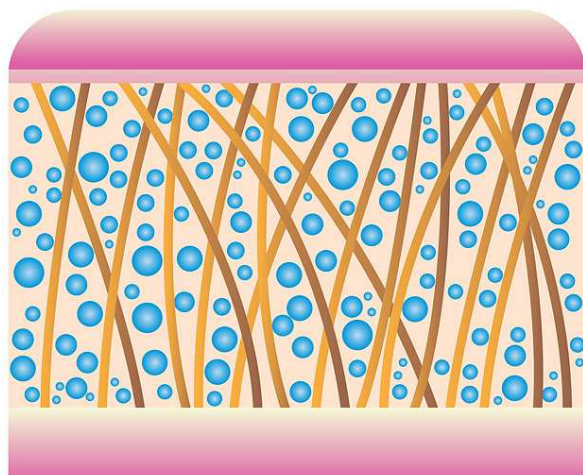

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

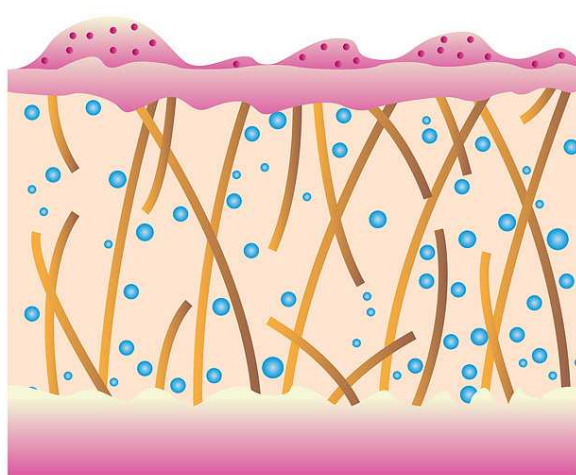

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Oxygen Professional Clinic Performance je multifunkční estetický přístroj, díky kterému poskytnete svým klientům maximální pleťovou péči na profesionální úrovni se špičkovými výsledky. Přístroj je určen do komerčního provozu kosmetického studia nebo estetické kliniky pro ošetření obličeje, krku a dekoltu. Disponuje všemi technologiemi ošetření pleti, které jsou aktuálně v oblasti neinvazivní estetiky k dispozici. Vše, na co jen pomyslíte. 14 různých technologií ve 13 aplikačních hlavicích a obličejové masce. BeautyRelax Oxygen Professional Clinic Performance zajistí vyčištění pleti, zvýšení pružnosti pleti, lifting pleti, hydrataci pleti, zapracování kosmetických přípravků, zklidnění pleti. K dispozici vám bude celá řada technologií: vodní dermabrazie, plasmová terapie, ultrazvuk, nano hydratace, kyslíková terapie, radiofrekvence, mezoterapie, EMS pulzy, mikro proud, fotonová terapie, působení tepla a chladu. Pokud v životě neděláte žádné kompromisy a vždy se spokojíte pouze a výhradně s tím nejlepším, model BeautyRelax Oxygen Professional Clinic Performance je určen právě pro vás!



POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC

1. VODNÍ DERMABRAZE
2. TECHNOLOGIE PLASMOVÉHO TOKU S OZONEM
3. ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE
4. KYSLÍKOVÁ TERAPIE
5. NANO HYDRATACE
6. BIPOLÁRNÍ RADIOFREKVENCE PRO OČNÍ OKOLÍ
7. MIKROPROUD V PROVEDENÍ VÁLEČKOVÉHO APLIKÁTORU
8. ULTRAZVUKOVÉ VLNY
9. ELEKTROFORÉZA PRO NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPII
10. ROBOTICKÁ MEZOTERAPIE
11. TEPELNÁ TERAPIE – PŮSOBNÍ TEPLA A CHLADU
12. RADIOFREKVENCE THERMAGE
13. FOTONOVÁ TERAPIE



POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice
2. Dotykový displej pro ovládání přístroje
3. Regulace síly vakuového sání
4. Volba zásobníku na vodu A B C
5. Množství načerpávané vody
6. Zásobníky na vodu A B C D
7. Hlavní zásobník na vodu
8. Kolečka přístroje
9. Napájecí kabel
10. Tlačítko ON/OFF



POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice
2. Zásobníky na vodu A B C D
3. Odpadní nádobka na znečištěnou vodu
4. Kazeta se vzduchovým filtrem



SCHÉMA ZAPOJENÍ APLIKAČNÍCH HLAVIC


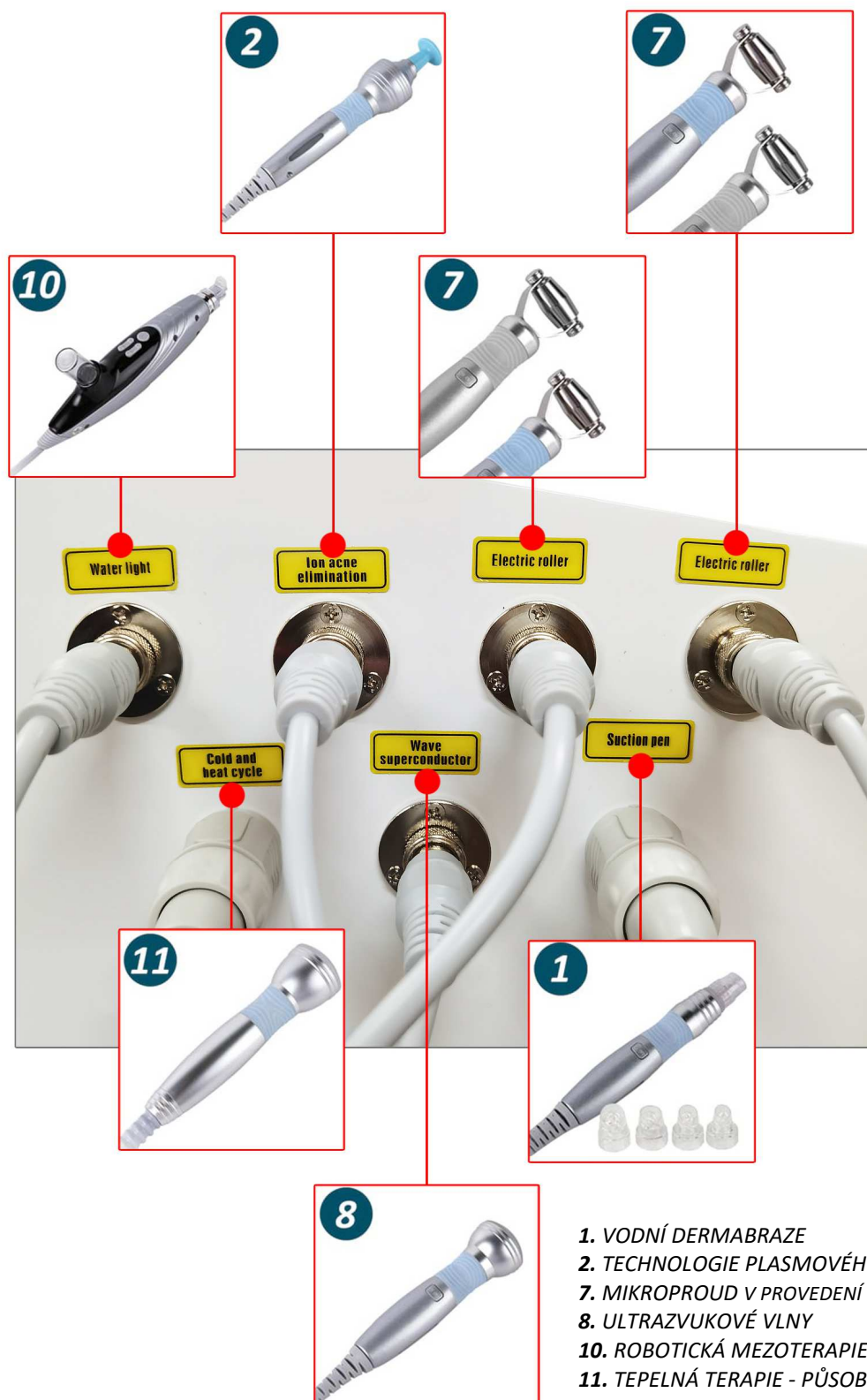


SCHÉMA ZAPOJENÍ APLIKAČNÍCH HLAVIC

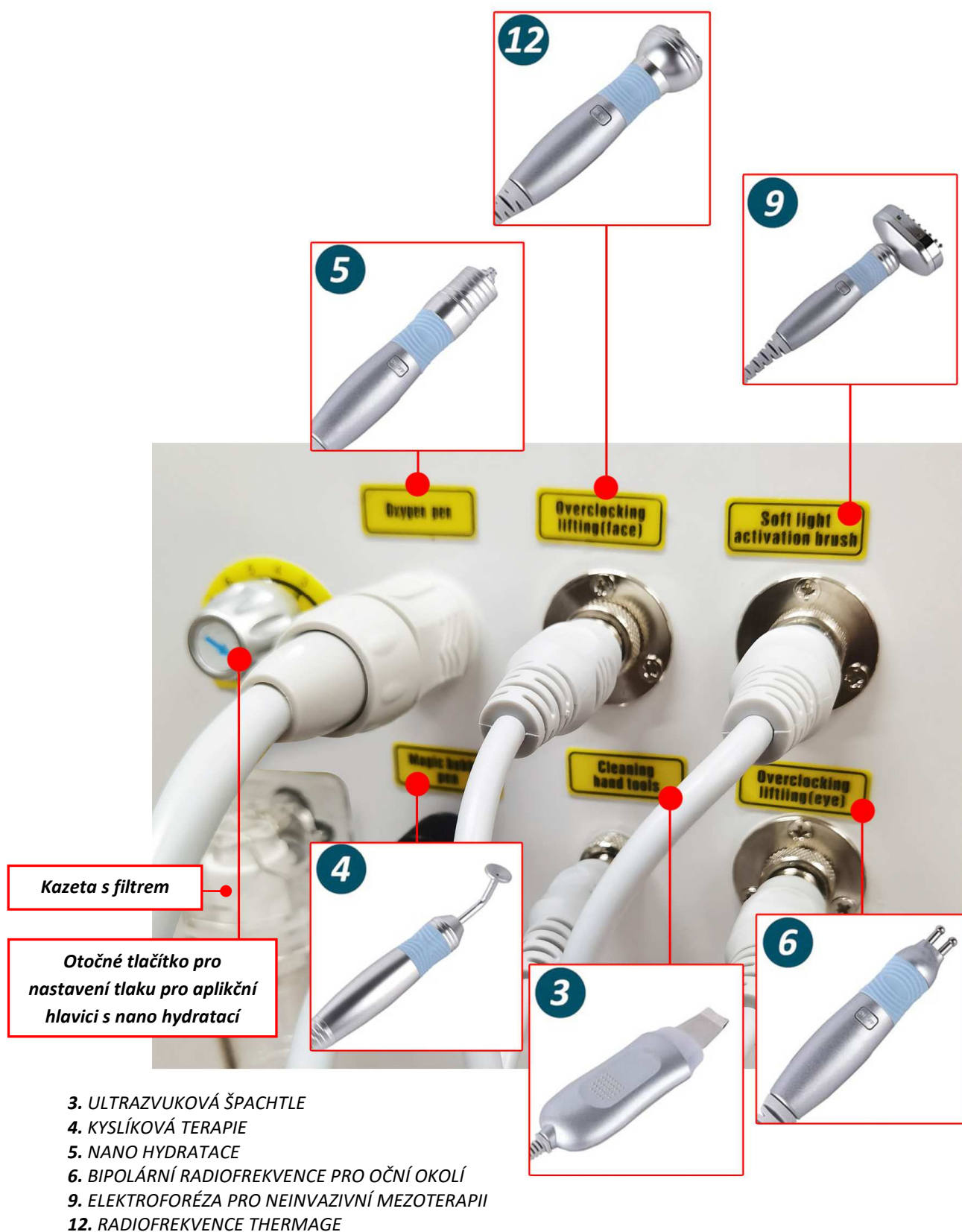


INSTALACE PŘÍSTROJE

1. Všechny části přístroje zbavte obalového materiálu.
2. Upevněte na zadní stranu hlavní jednotky držák na aplikační hlavice. Šroubky utahujte s citem, aby nedošlo ke stržení závitu.
3. Hlavní jednotku umístěte na rovnou, suchou a plochu. Doporučujeme vybrat takové místo, které je blízko elektrické zásuvky.
4. Hlavní jednotku přístroje připojte k napájecímu adaptéru. Jeden konec připojte do zdířky na boční straně přístroje. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické sítě 220V.
5. Připojte všechny aplikační hlavice.
6. Pokud se rozhodnete vyměnit aplikační hlavici, přístroj musí být vždy vypnutý.
7. Při umístění hlavní jednotky berte ohled na vzdálenost k hlavě klienta. V průběhu použití by neměly být kabely aplikačních hlavic příliš napnuté.
8. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka **ON/OFF** na boční straně hlavní jednotky do polohy 1. Zapnutí přístroje doprovází zapnutí displeje. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Dotkněte se displeje. Nápis Welcome. Zvolte jazyk **ENGLISH** (angličtina).
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF** na zadní straně hlavní jednotky do polohy 0.



*Konektory aplikačních hlavic mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky na zadní straně přístroje je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. **Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.***

**Utážení
prstence
zašroubováním**

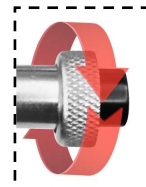


DOPLNĚNÍ ZÁSObNÍKU - TEPELNÁ TERAPIE

V přístroji je integrovaný zásobník na vodu. Pro správnou funkci tepelné terapie musí být zásobník naplněn vodou. Přístroj vodu ohřívá/chladí dle vámi požadované teploty. Upravená teplota vody dle vašeho požadavku je následně přečerpána do aplikační hlavičky. Kontaktní plocha, která je v kontaktu s pleť, chladí nebo hřeje. K tomuto účelu použijte konektor na boční straně přístroje - **INJECTION**, **OVERFLOW** a **DRAINAGE**. Vodu je nezbytné vyměnit 1x za měsíc bez ohledu na četnost používání přístroje. Se zásobníkem na vodu postupujte následovně:

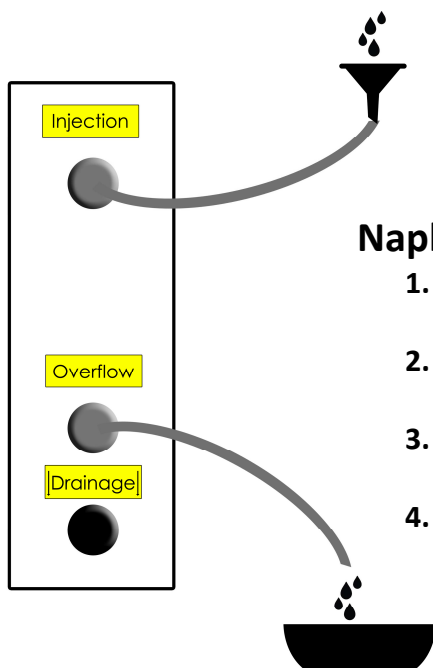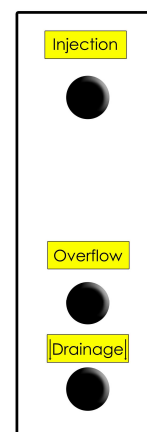

Naplnění zásobníku


1. Odšroubujte černé krytky u nápisu **INJECTION** a **OVERFLOW**. Připojte k oběma konektorům hadice.
2. Pomocí trychtýře postupně dávkujte vodu do hadice připojené ke konektoru **INJECTION**.
3. Vodu dávkujte tak dlouho, dokud nezačne vytékat z hadice připojené ke konektoru **OVERFLOW**.
4. Odšroubujte obě hadice pryč a konektory zakryjte černými krytkami (konektory **INJECTION** a **OVERFLOW**).

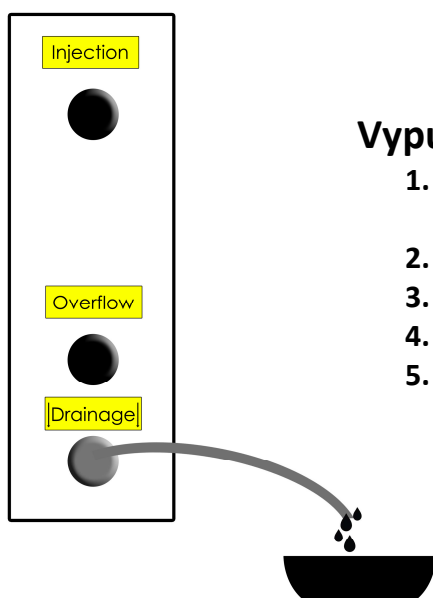

Vypuštění zásobníku

1. Umístěte pod konektor **DRAINAGE** hadřík pro zachycení případných kapek vody.
2. Odšroubujte černou krytku u nápisu **DRAINAGE**.
3. Připojte ke konektoru **DRAINAGE** hadici.
4. Nechte obsah nádržky přirozeně vyprázdnit do mělké misky.
5. Odšroubujte pryč hadici a konektor uzavřete černou krytkou.

VODNÍ DERMABRAZE

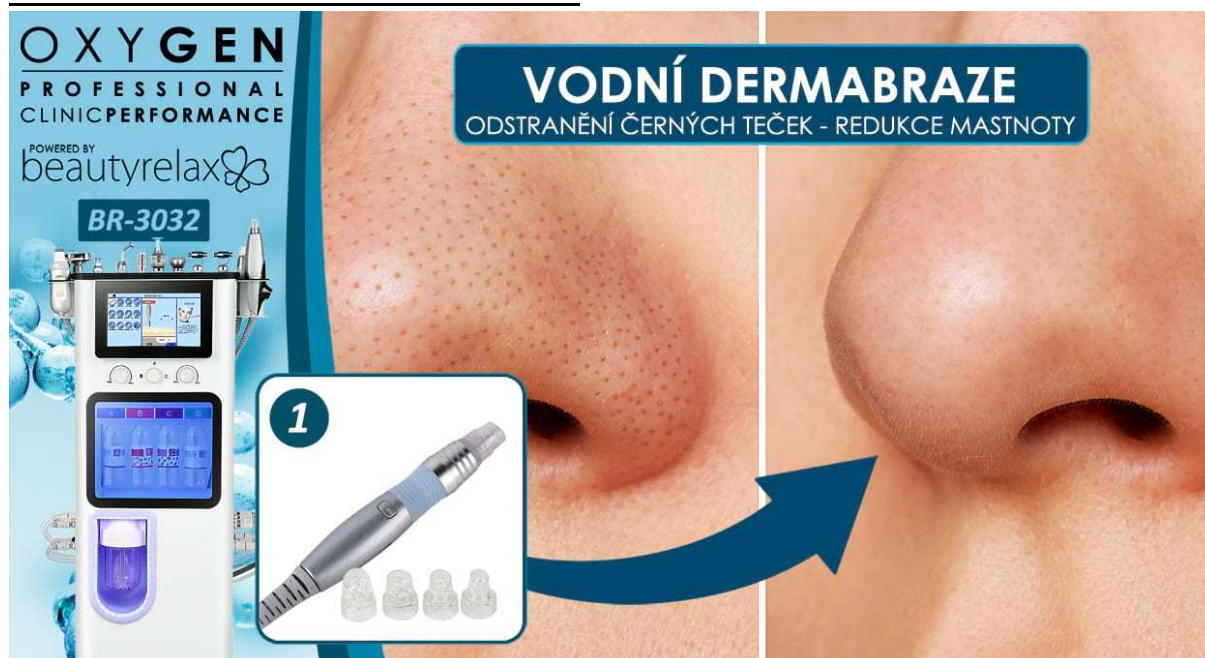


Aplikační hlavice je speciálně navržena tak, aby pravidelně dávkovala tekutinu. Tekutina je navíc obohacena o částice kyslíku. Přečerpávání tekutiny z jedné nádržky do druhé. Tekutina okamžitě hydratuje pleť a zbytek na sebe naváže nečistoty, bakterie a kožní rezidua. Nasátá tekutina z pleti putuje do odpadní nádobky. Při plném kontaktu aplikátoru s pleť nedochází k nežádoucímu ztékání tekutiny. K dispozici je 8 vyměnitelných aplikátorů různých průměrů pro ošetření velkých i malých ploch. 4 aplikátory jsou z tvrdého plastu, 4 z pružné pryže.













Systém vakuového nasávání

Estetický přístroj BeautyRelax pleť důkladně vyčistí. V případě vzniku černých teček a pupíků napomáhá k jejich odstranění. Aplikační hlavice nasaje pokožku a hrana aplikátoru odstraní z povrchu nečistoty, černé tečky a nevzhledné bílé čepičky. Nepříjemnému ručnímu vymačkávání, které způsobí výrazně zarudnutí a podráždění pleti je definitivní konec! Povrchové pigmentové skvrnky a póry se zjemňují. Estetický přístroj BeautyRelax je vysoce účinný, ale zároveň šetrný k pleti!

Systém vodní cirkulace

Aplikační hlavice pro vodní dermabrazi má speciální provedení. Konstruktivní řešení je navrženo tak, aby byla přivedena k pleti čistá voda, která je následně zpět nasáta do odpadní nádobky. Voda takto plynule cirkuluje. Načerpaná voda neztéká po pleti, ale je zpět nasáta společně s veškerými nečistotami. Vodní okruhy jsou odděleny. Voda je načerpaná z nádržky s čistou vodou a následně přečerpána do odpadní nádržky. Vodní dermabraze patří mezi nejúčinnější, ale zároveň nejšetrnější metodu čištění pleti, kterou si můžete dopřát. Metoda vhodná pro všechny typy pleti. Suchá pleť se při tomto procesu zároveň hydratuje. Pleť s větším množstvím seba je zbavena povrchové mastnoty.



 Oxygen pen	 Cleaning hand tools	 Ian acne elimination	 Suction pen
 Wave superconductor	 Electric roller	 Overclocking lifting (eye)	 Magic bubble pen
 Soft light activation brush	 Cold and heat cycle	 Overclocking lifting (face)	 Water light

Suction pen


A B C


Heating

◀ 00 ▶

Time(Min)

◀ 30 ▶






Time remaining: 30Min 00s

START
PAUSE

WARM PROMPT



Main function deep clean pores, choose suitable for customer skin head (normal skin with hard glue, sensitive skin with soft head, oily skin with frosted head) choose the corresponding solution bottle to open the switch, press with thumb, adjust the appropriate suction and water (suction clockwise, current counter, suction not water best) down the face, fixed operation or short distance pull (1-2cm), face 1-2 times, T area can strengthen the operation.

Pro použití funkce vodní dermabraze stiskněte tlačítko na displeji **(1)**.

- V režimu vodní dermabraze slouží jako zdroj vody zásobníky A B C. Pomocí otočného kolečka na čelním panelu si můžete nastavit zásobník, ze které bude voda načerpána.
- Zásobník na tekutinu naplňte. Použijte výhradně destilovanou nebo kojeneckou vodu. Voda nesmí obsahovat vodní kámen, který by mechanicky poškodil přístroj. Stejně tak do zásobníku na tekutinu nepřimíchejte další látky. Mohlo by dojít k zanesení přístroje, jeho poškození a ztrátě záruky.
- Vyberte některý z vyměnitelných aplikátorů. Mají různý průměr velikosti. Zvolte takový, který nejvíce vyhovuje ošetřované části pleti a reliéfu povrchu pokožky. 4 aplikátory jsou z tvrzeného plastu, 4 aplikátory jsou z měkké pryže. Zvolte si typ aplikátoru a průměr, který vám bude nejvíce vyhovovat. Větší průměr na pro velké partie, menší průměr aplikátoru pro malé partie.
- **HEATING < >** Pomocí šipek si můžete nastavit teplotu vody. Teplotu vody je schopen přístroj na cestě k pleti upravit. Pomocí špek z zvolte takovou teplotu, která vám nejvíce vyhovuje.
- **TIME (MIN) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- Funkci vodní dermabraze můžete aktivovat stisknutím tlačítka **START**. Činnost můžete zastavit pomocí tlačítka **PAUSE**. Na displeji máte stále zobrazen zbývající čas použití funkce.
- Zbývající čas je zobrazen na displeji **TIME REMAINING**.
- Pomocí levého otočného tlačítka si můžete nastavit zvýšení vakuového nasávání. Pomocí pravého otočného tlačítka si můžete nastavit množství vody, které má v aplikační hlavici cirkulovat.
- Aby bylo použití funkce vodní dermabraze maximálně efektivní, je třeba vhodně skloubit následující parametry:
 1. Vhodný průměr a typ aplikátoru
 2. Optimální nastavení teploty vody
 3. Optimální nastavení výkonu vakuového sání (jakou silou má vakuum působit)
 4. Optimální nastavení množství vody, které má na pleť působit.

Pokud budete mít nastavenou úroveň vakua příliš silně, bude se vám aplikátorem po pleti hůře pohybovat. Pokud budete mít úroveň vakua příliš slabě, aplikátor nebude v dostatečném kontaktu s pleť. Pokud budete mít nastavené příliš velké množství vody, hlavice nebude schopna rychle tekutinu odvádět nazpět do přístroje. Pokud budete mít nastavené příliš malé množství vody, pokožka se nedostatečně propláchně.

- Hlavici se po pleti pohybujte krátkými táhlými pohyby. Druhou rukou si můžete pleť udržovat napnutou.
- Pro funkci vodní dermabraze je vždy třeba kontrolovat zásobníky na vodu. Pomocí prostředního otočného tlačítka si můžete snadno přepínat mezi jednotlivými zásobníky. Funkce vodní dermabraze načerpává vodu ze zásobníků A B nebo C.



(1) regulace síly vakuového sání

(2) volba zásobníku na vodu

(3) množství načerpávané vody

PLASMA TERAPIE




Jak naše tělo stárne, mění se vlastnosti a celkový vzhled pleti. Epidermis se v průběhu času ztenčuje. Pigmentové skvrny jsou viditelnější. Produkce kolagenu zpomaluje. Dochází ke snížení pružnosti pleti. Kontury obličeje ochabují. Vrásky se prohlubují a stávají se viditelnější. Technologie plasmového toku s ozonem představuje skutečně funkční řešení, jak průběh těchto procesů zvrátit.

Plasmový tok s ozonem přistupuje k ošetření pleti z opačného konce. Většina technologií pro kosmetické ošetření řeší až následek. Tvorba černých teček jako následek zanedbání čištění pleti. Eliminace vrásek jako následek působení stárnutí. Ucpané kožní póry jako následek zvýšeného výskytu mastnoty pleti. Ošetření plasmou s ozonem funguje jako prevence vzniku nežádoucích kožních defektů.

Keramická plocha aplikátoru generuje stejnosměrný proud s vysokofrekvenčním napětím. Plasmový výboj vzniká mezi keramickým aplikátorem hlavice a pletí. Při výboji jsou využity atomy kyslíku obsažené ve vzduchu. Přiblížením aplikátoru k pleti dochází k plasmovému výboji, který sterilizuje pleť a nekompromisně zlikviduje veškeré bakterie na jejím povrchu.

PRŮNIK PLASMOVÉHO TOKU

Výkon plasmového toku je přesně optimalizován, aby působil přes povrch pleti až k vrstvě dermis.

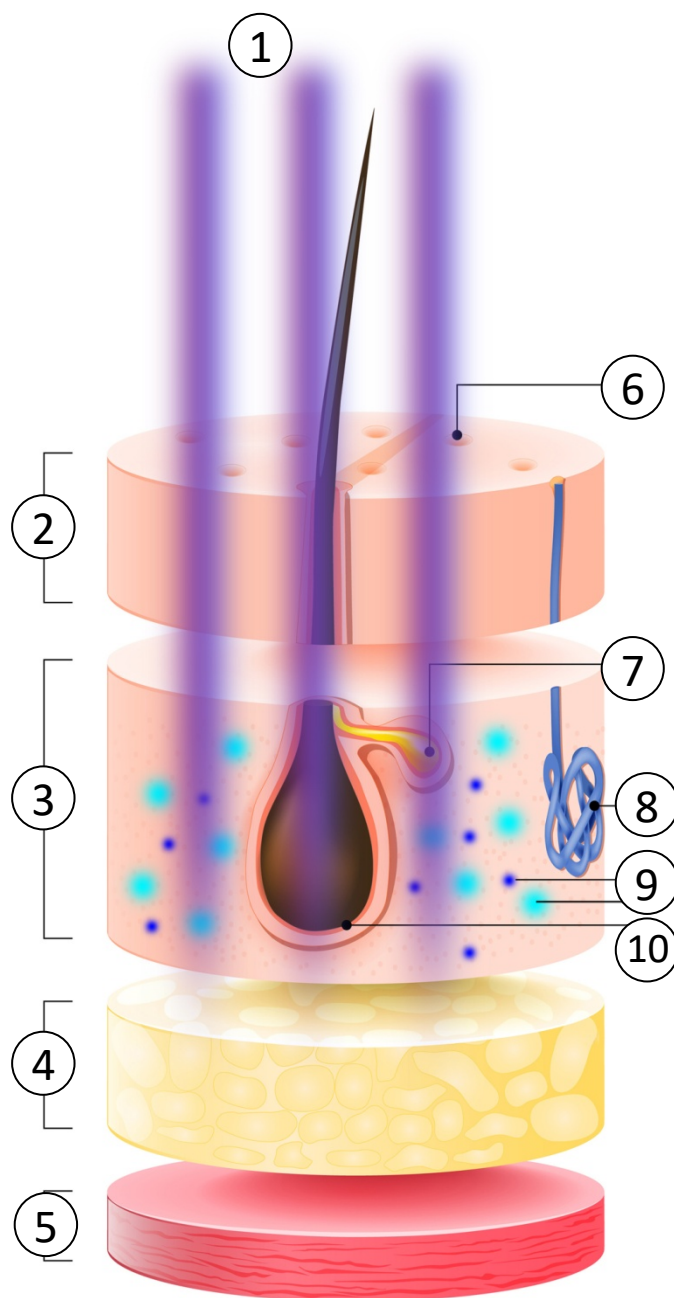

1. Působení plasmového toku

2. Epidermis

3. Dermis

4. Tuková tkáň

5. Svalová tkáň

6. Kožní pór

7. Mazová žláza vlasu

8. Potní žláza

9. Kolagenní a elastická vlákna

10. Vlasová cibulka

IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH

Opakovaný výskyt akné na pleti



Zvětšené póry



Výskyt svědění



Zvýšená mastnota pleti



NEŽ ZAČNETE PLASMA TERAPII POUŽÍVAT


Než přistoupíte k samotnému ošetření pleti s technologií plazmy, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Vyčkejte, až pleť zcela uschne. **Na pleti se před použitím nesmí vyskytovat stopy vlhkosti.** Před prvním použitím přístroje si vyzkoušejte jeho aplikaci např. na předloktí. Vyčkejte přibližně 1 hodinu, zda při použití přístroje nebude pokožka negativně reagovat.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLASMA TERAPIE

- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte silnými ekzémy nebo jiným velmi závažným kožním onemocněním.
- Netlačte aplikační hlavici příliš velkou silou na pleť.
- Po ošetření je doporučeno používat vyživující masku, krém nebo noční krém.
- Po ošetření obličeje vyčkejte, až se pleť mírně zklidní a poté můžete aplikovat make-up podle potřeby.

OPTIMÁLNÍ POSTUP OŠETŘENÍ PLASMOU

- Proveďte odličení pleti běžným způsobem. Využít můžete hlavici s vodní dermabrazí nebo ultrazvukové špachtle. Na pleti by neměly ulpět žádné zbytky makeupu. Jakékoliv nečistoty, které ulpí na pleti, snižují výsledný efekt plazmových toků.
- **Před ošetřením pleti plasmovými toky by měla být pleť dokonale suchá. Dbejte na to především v letních měsících, kdy se pleť horkem potí. V případě potřeby v průběhu použití hlavičky s plasma terapií udělejte pauzu a pleť důkladně osušte.**
- Sundejte veškeré šperky jako např. náušnice, náhrdelníky, náramky, apod.
- Pleť ošetřete pomocí aplikační hlavičky s plasmovými toky.
- Zvolte takový aplikátor, který odpovídá velikosti ošetřované plochy. K dispozici jsou na výběr dva aplikátory s různými průměry.
- Pomalu se pohybuje aplikační hlavičkou po pleti.
- Ošetření pleti je naprosto bezbolestné. Během používání můžete cítit mírné aroma, které doprovází průběh působení plazmového toku. Je to vůně ozonu, který se v průběhu ošetření uvolňuje. Je to podobné aroma, jako po intenzivním dešti.
- Pokožka může v oblasti ošetření mírně zarudnout. Jedná se o přirozený jev. Pleť se v řádu několika minut dostane do normálu.
- Aplikační hlavička se nesmí v průběhu ošetření pleti dostat do kontaktu s žádným kovovým předmětem. Případné kovové implantáty v dutině ústní (můstky, atd.) překážkou v použití nepředstavují.
- V průběhu ošetření neaplikujte žádný druh kosmetického přípravku.
- Zaměřte se na vybrané části obličeje nebo dekoltu, kde potřebujete účinek přístroje nejvíce.
- Po ošetření pleti přístrojem použijte jakýkoliv kosmetický přípravek, krém nebo sérum.
- Použití technologie pomocí plazmových toků je vhodné zařadit do fáze čištění pleti.
- Terapie pomocí plazmy je vynikající na kompletní sterilizaci povrchu pleti od bakterií, roztočů a nežádoucích mikroorganismů.

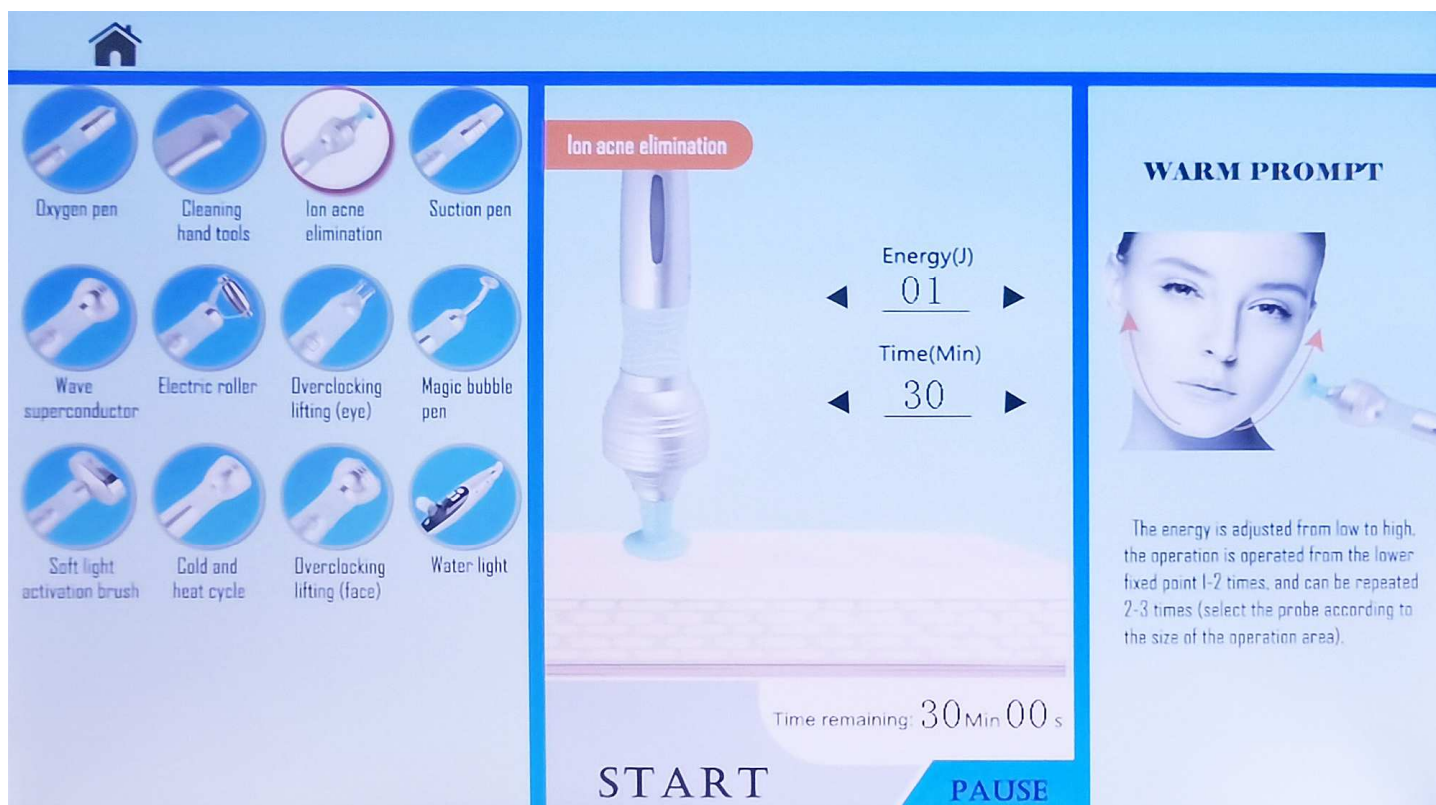

PLASMA TERAPIE

- Pro použití funkce plasmových toků stiskněte na displeji příslušné tlačítko.
- **ENERGY (J) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit intenzitu působení plasmových toků. K dispozici je 10 úrovní výkonu. Zvolte si tu, která vám na pleť nejvíce vyhovuje.
- **TIME (MIN) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- **Obsluha aplikační hlavice by měla v průběhu použití hlavice s funkcí plasmu používat gumové zdravotnické rukavice.**
- Ošetřete plynule celou plochu obličeje, krku a dekoltu.
- Doporučená délka ošetření: 2 až 3 min.
- Zbývající čas je zobrazen na displeji **TIME REMAINING**.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte.

ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE




Aplikační hlavice estetického přístroje BeautyRelax generuje prostřednictvím aplikační hlavice ultrazvukové vlny. Frekvenční kmitočet ultrazvuku 24khz je optimalizovaný pro dosažení požadovaného účinku bez poranění pleti. Veškeré nečistoty, zbytky makeupu a odumřelé kožní buňky ulpí na hrotu aplikátoru. Ultrazvuk pronikne i do těch nejmenších záhybů. Dokonale se přizpůsobí tvaru obličeje.


- Odstranění odumřelých kožních buněk a nežádoucích reziduí.
- Dokonalý peeling pleti až do hloubky kožních pórů.
- Funkční prevence proti vzniku černých teček a ucpávání kožních pórů.
- Neinvazivní bezbolestné ošetření bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Lokální podpora krevního oběhu pro stimulaci lymfatického systému obličeje.

ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE

Aplikační hlavice je díky speciálnímu tvarování určena pro ošetření pleti dvěma způsoby. Dvě možnosti, jakými ošetřit povrch pleti:

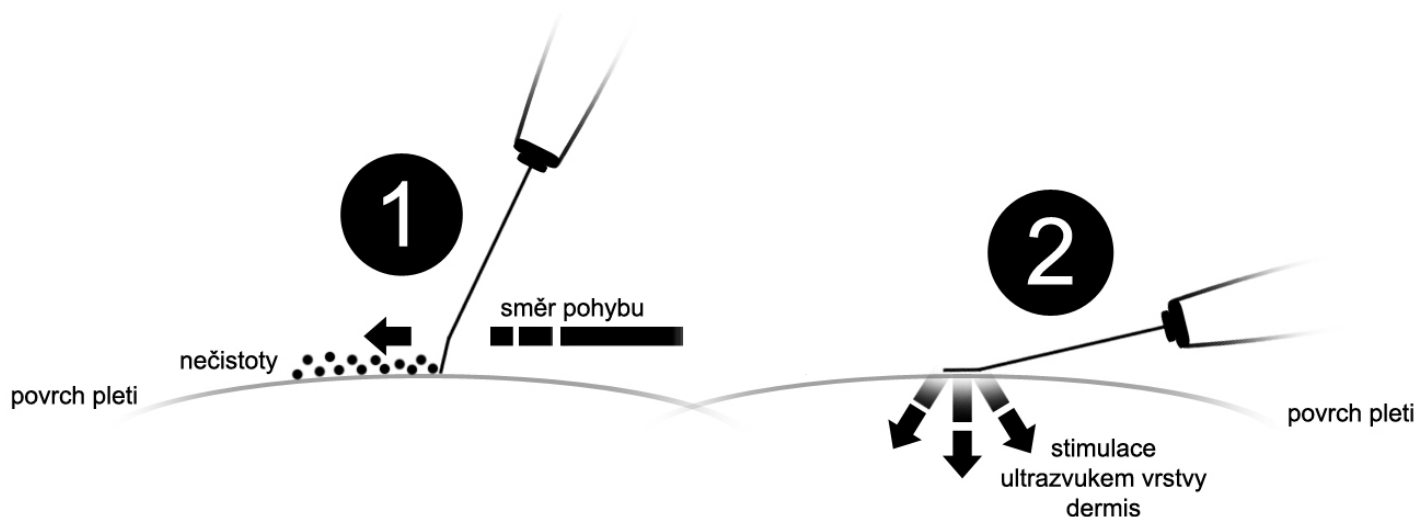

- **Obrázek (1)** Špička aplikátoru je ideální zejména pro intenzivní čištění pleti. Pohyb aplikátoru v kombinaci s působením ultrazvukových vln zbavuje pokožku odumřelých buněk a reziduí.
- **Obrázek (2)** Větší koncová plocha aplikátoru je ideální pro stimulaci pleti ultrazvukovými vlnami s cílem podpořit lokální krevní oběh a stimulovat tvorbu kolagenních a elastických vláken. Dochází ke zlepšení lokálního krevního oběhu a navíc můžete lépe zapracovat kosmetické přípravky. Optimální je působení kontinuálních ultrazvukových vln.
- Po každém použití nasadte zpět ochranný kryt pro dlouhou životnost aplikátoru.
- Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Radiofrekvenční vlny se tak mohou na pleť důkladně navázat.

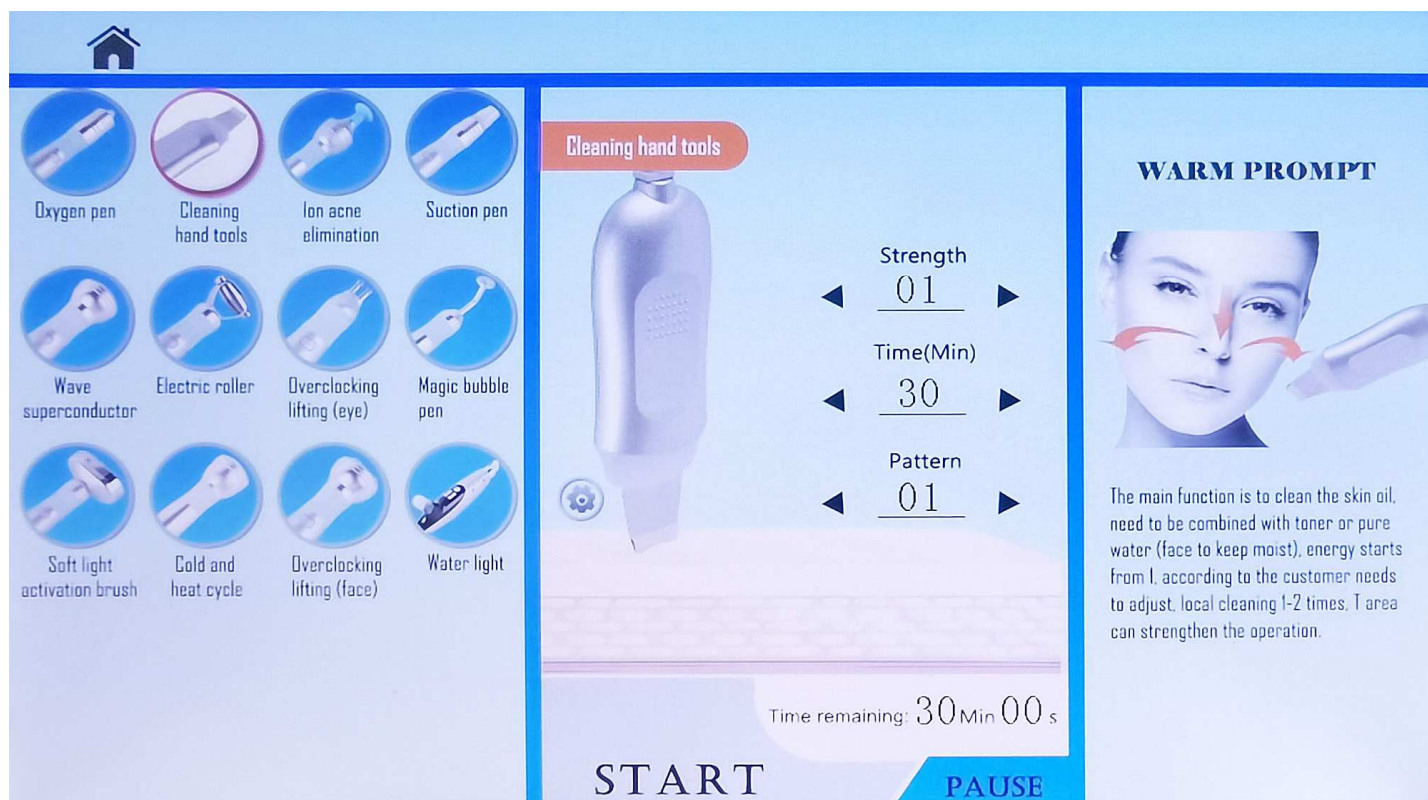


ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE

- Funkci ultrazvukové špachtle snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji.
- **STRENGTH (J)** < > Pomocí šipek si můžete nastavit intenzitu působení ultrazvuku. K dispozici je celkem **10 úrovní výkonu**. Zvolte si intenzitu, kdy můžete na pleti vnímat působení ultrazvuku, ale na druhou stranu je vám použití příjemné.
- **TIME (MIN)** < > Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- **PATTERN (MIN)** < > Pomocí šipek si můžete nastavit režim působení ultrazvuku. K dispozici jsou 3 různé režimy, ve kterých působí ultrazvuk kontinuálně nebo přerušovaně. Doporučujeme používat nejčastěji režim, ve kterém působí ultrazvuk stále bez přerušení.
- Doporučená délka ošetření: 1 až 3 min. Každé místo ošetřit alespoň dvakrát.
- Zbývající čas je zobrazen na displeji **TIME REMAINING**.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte.

KYSLÍKOVÁ TERAPIE



Kyslík je plynný chemický prvek, který patří mezi jednu z hlavních složek zemské atmosféry. Je zcela nezbytný pro existenci živých organismů na Zemi. Kyslík je zcela zásadní pro správnou činnost lidského těla. Terapie kyslíkem se velmi často používá v lázních a rehabilitačních zařízeních s aplikací formou dýchací masky. Dojde k okamžitému okysličení mozku, potlačení migrén a celkově se člověk cítí lépe po psychické stránce. Stejným způsobem se v oblasti estetiky pracuje s kyslíkem při ošetření pleti. BeautyRelax Oxygen Professional Clinic Performance má speciální konstrukční řešení, které extrahuje kyslík z obyčejné vody. Na zadní straně přístroje naleznete zásobník, který stačí naplnit vodou (doporučujeme destilovanou nebo kojeneckou vodu). V zásobníku je integrované technické řešení, které zajišťuje proces elektrolýzy. Jakmile tuto funkci aktivujete, molekuly kyslíku jsou okamžitě extrahovány z vody v zásobníku. Kyslík je následně společně s vodou přečerpáván pomocí vodního čerpadla. Tekutina je také obohacena o kyslík v režimu vodní dermabraze.

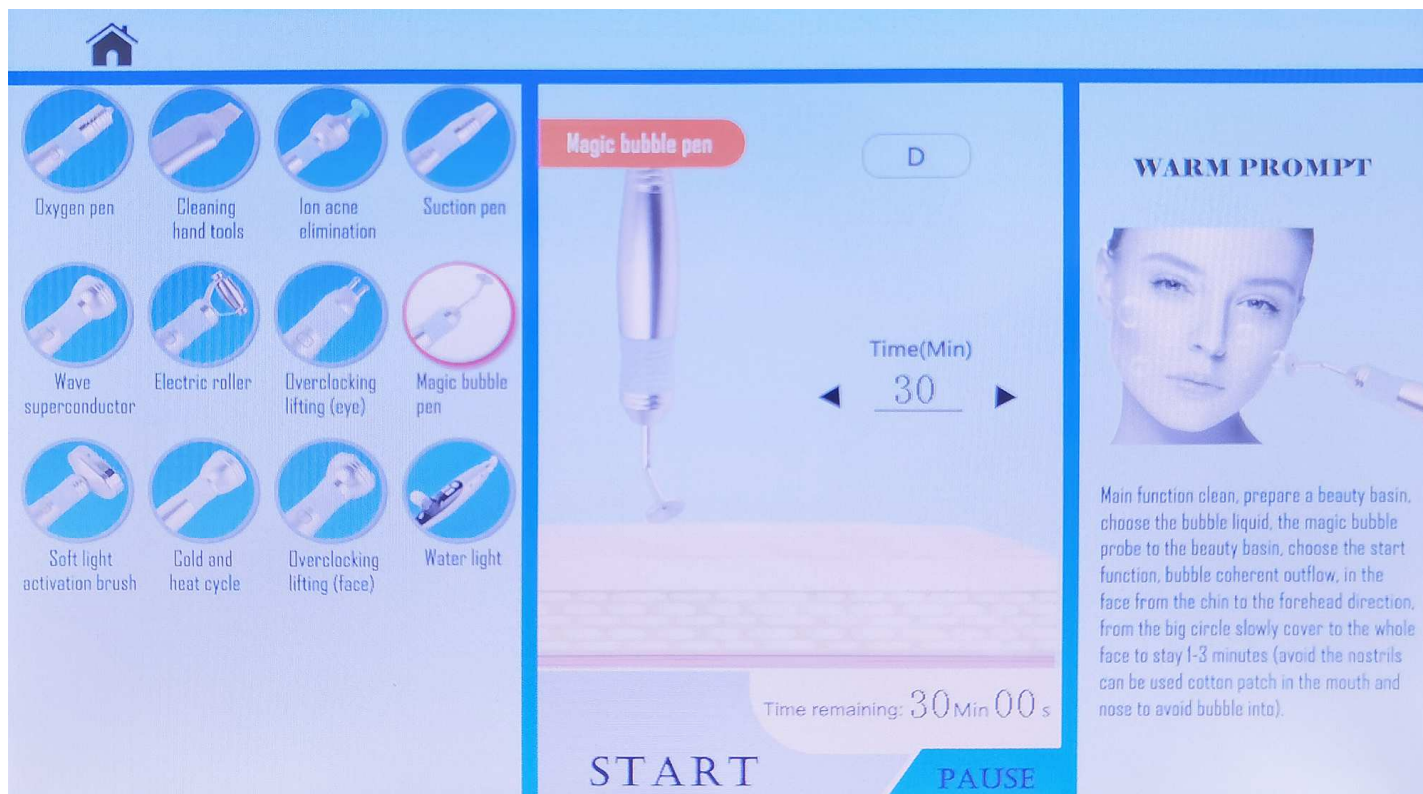

KYSLÍKOVÁ TERAPIE


- Funkci kyslíkové terapie snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji.
- Použití hlavice s kyslíkovou terapií je trochu specifické. Po aktivaci této funkce začne z aplikátoru proudit voda pod tlakem. Tekutina se čerpá ze zásobníku D. Před použitím této funkce si ověřte, že je zásobník naplněný vodou.
- Proudění vody pod tlakem má své výhody i nevýhody. Díky tlaku se pokožka velmi efektivně omyje. Je tak dobré použít v případě, pokud chcete pleť připravit na další fáze ošetření. Proud vody má navíc velkou výhodu efektivní penetrace částiček okysličené vody do pleti. Nevýhodou je však velké množství zůstatkové vody, která ztéká klientovi po pleti.
- V optimálním případě doporučujeme hlavu klinta umístit do speciálního kadeřnického umyvadla. Zbytková voda tak může rovnou odtékat do výlevky umyvadla.
- S aplikátorem postupně pokrýjte celou plochu obličeje. Používejte opatrně, aby proud vody nenatekl klientovi do nosu, uší nebo očí.
- **TIME (MIN) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- Doporučená délka ošetření: 1 až 3 min.
- Zbývající čas je zobrazen na displeji **TIME REMAINING**.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte.

NANO HYDRATACE



Vysoce účinná metoda pro okamžitou hydrataci pleti. Násobně zvyšuje účinnost klasických hydratačních přípravků na vodní bázi. Během několika sekund poskytnete vaší pleti dostatečnou vlhkost. Použití je vhodné pro všechny typy pleti. Kosmetický přístroj pracuje s atomizérem nové generace. Tekutina putuje ze zásobníku přímo do atomizéru, který štěpí molekuly roztoku na velikost nanočástic. Atomizér promění hydratační přípravek na ionizovanou nano mlhu. Nově vzniklé částičky kapaliny mají menší velikost než samotný kožní pór. Hydratační přípravek tak snadno pronikne přes horní vrstvu pleti. Dochází k okamžité hydrataci pleti s maximálním účinkem!


- Můžete použít jakýkoliv roztok, který není založen na olejové bázi.
- Atomizér nové generace vytvoří nano mlhu.
- Molekuly roztoku pronikají přes kožní póry přímo do pokožky.
- Okamžitá hydratace pleti během několika sekund.

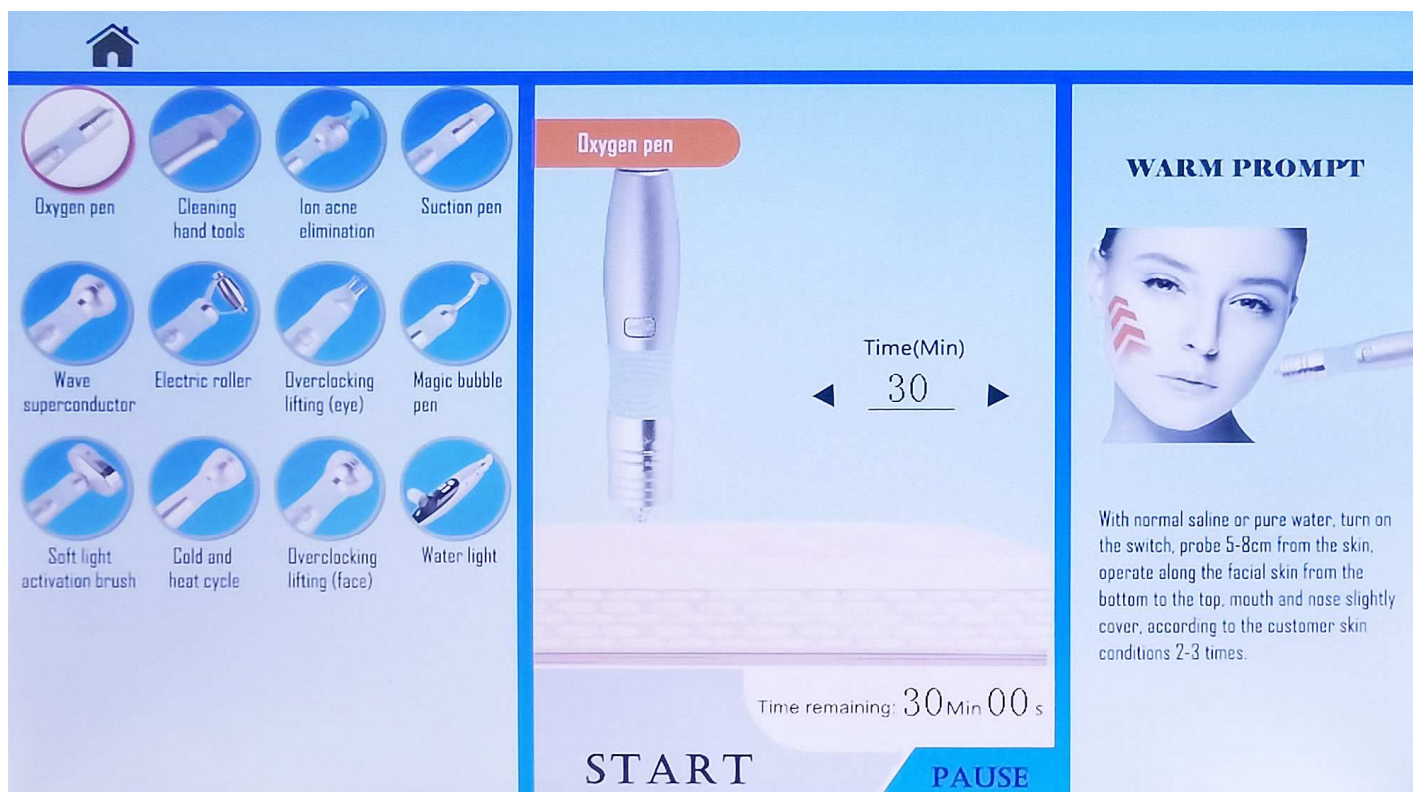


NANO HYDRATACE

- Funkci nano hydratace snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji.
- Aplikanční hlavice má dva vyměnitelné aplikátory. Každý aplikátor nabízí specifický rozptýl nano vodní mlhy. Větší kuželovitý proud nano mlhy je zacílen více do šířky a pokryje větší plochu. Užší kuželovitý proud nano mlhy cílí na menší plochu.
- Při výměně aplikátoru dotáhněte korunku nadoraz. Aplikátor tak udržíte v pevném spojení s aplikační hlavicí.
- S aplikátorem se pohybujte v dostatečné vzdálenosti od pleti. Optimálně v rozsahu od 5 do 8cm. Pokud budete příliš blízko, nano mlha bude příliš rychle kondenzovat na povrchu pleti. Pokud budete od pleti příliš daleko, efekt působení nano mlhy bude snížen.
- Hlavice si čerpá vodu z hlavního zásobníku, který je kolem dokola modře podsvícen. Ověřte, že je v zásobníku dostatečné množství vody.
- Sílu proudu si můžete nastavit pomocí otočného kolečka na boční straně přístroje v dolní části. Otočné kolečko je umístěné nad kazetou se vzduchovým filtrem.
- **TIME (MIN) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- Zbývající čas je zobrazen na displeji **TIME REMAINING**.
- Doporučená délka ošetření: 2 až 3 min.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte. **START/PAUSE** můžete také aktivovat pomocí tlačítka umístěného přímo na aplikační hlavici.

BIPOLÁRNÍ RADIOFREKVENCE PRO OČNÍ OKOLÍ

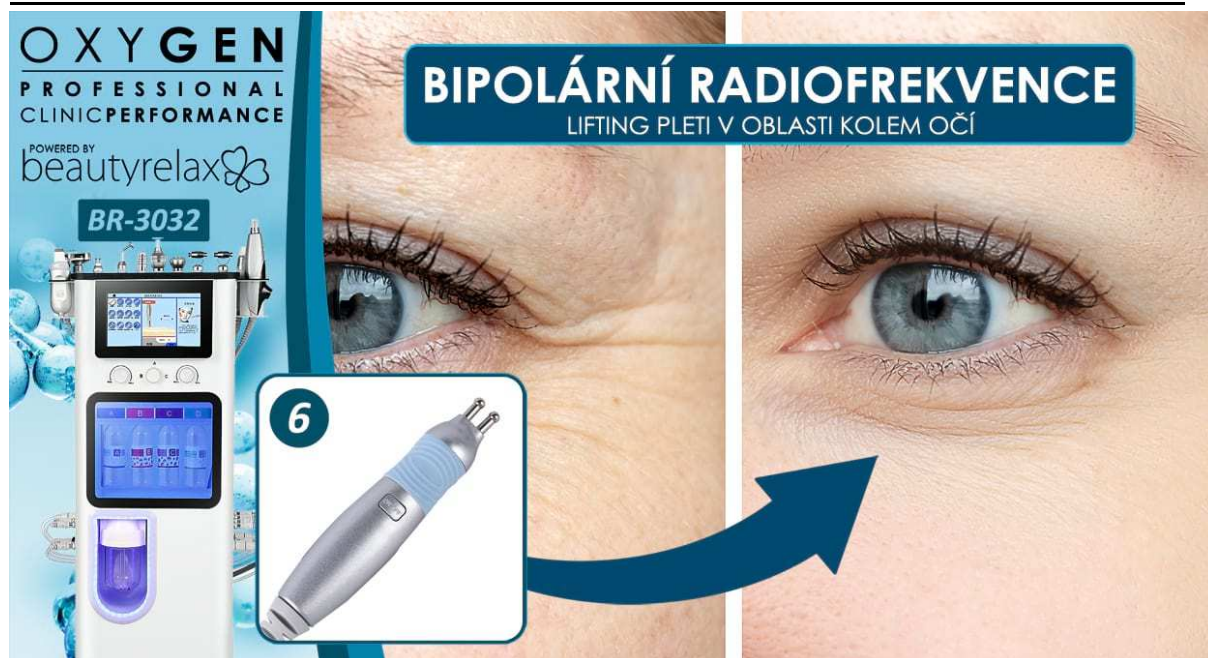

Oblast kolem očí je velmi specifická. V oblasti obličeje je nejvíc náchylné k projevům stárnutí pleti. Vějířkové vrásky kolem očí jsou velmi viditelné. Aplikační hlavice s dvěma kontaktními body je velmi vhodná pro oblast kolem očí. Působí účinně, ale zároveň šetrně. Oválné kontaktní body zajistí stálý plný kontakt s pletí v místech obličeje, krku a dekoltu s členitým reliéfem pleti s hlubšími či mělkými záhyby.

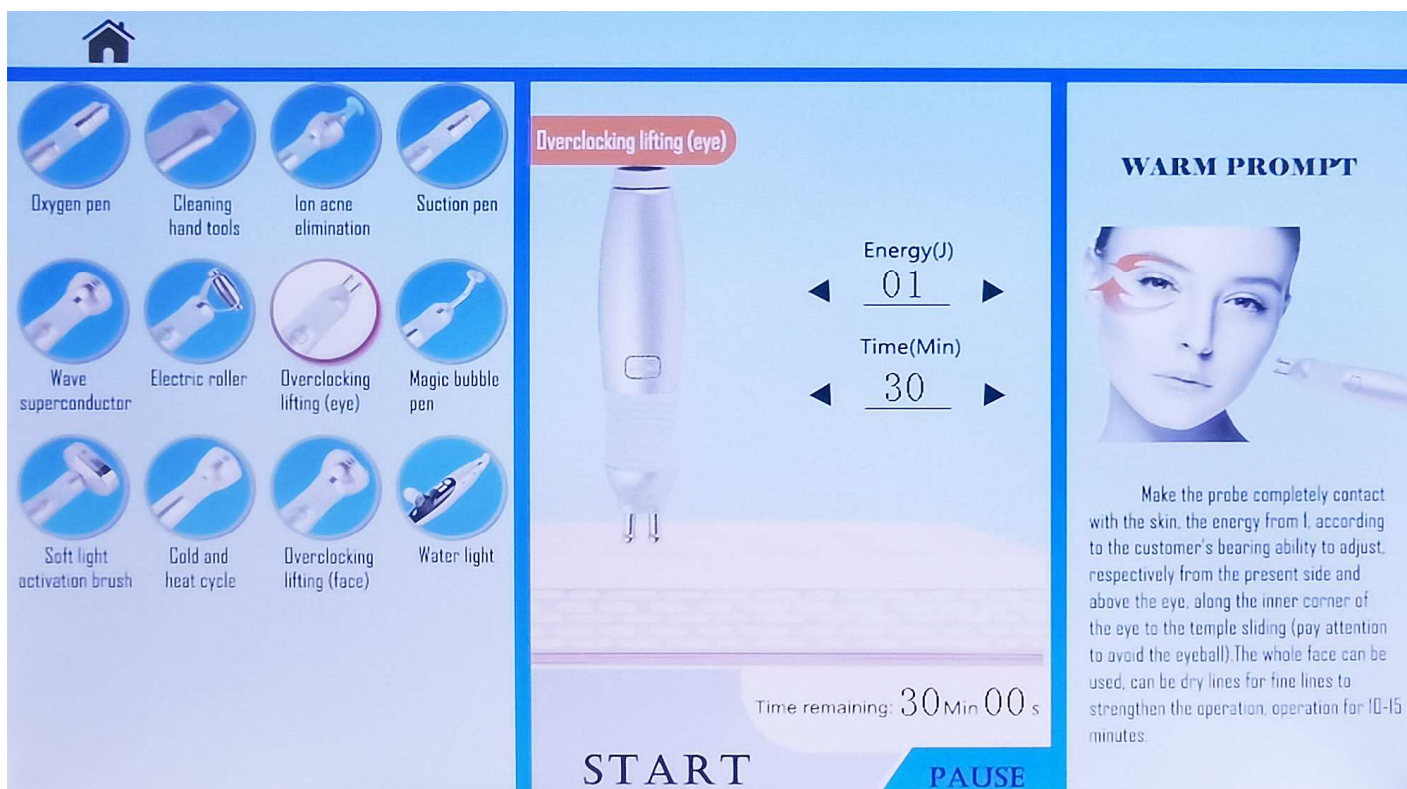


BIPOLÁRNÍ RADIOFREKVENCE PRO OČNÍ OKOLÍ

- Funkci ultrazvukové špachtle snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji.
- **ENERGY (J) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvence. K dispozici je celkem **10 úrovní výkonu**. Zvolte si intenzitu, kdy můžete na pleti vnímat působení tepla, ale na druhou stranu je vám použití příjemné.
- Dbejte zvýšenou pozornost s nastavením výkonu právě v použití očního okolí. Pokožka v oblasti očí je velmi tenká a citlivá. Na čele nebo bradě můžete vnímat stejnou hodnotu výkonu naprosto odlišně ve srovnání s použitím kolem očí.
- Při použití je třeba vždy aplikovat na pleť v místě použití sonogel. Gel pokožku dostatečně hydratuje a radiofrekvenční vlny se tak mohou na pleť lépe navázat s maximální účinností.
- **TIME (MIN) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- Zbývající čas je zobrazen na displeji **TIME REMAINING**.
- Doporučená délka ošetření: 10 až 15 min.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte. **START/PAUSE** můžete také aktivovat pomocí tlačítka umístěného přímo na aplikační hlavici.

MIKROPROUD



Informace o použití elektrického proudu ve vás může vyvolat strach případně smíšené pocity. Nemějte rozhodně žádnou obavu! V případě elektrického proudu, který používají kosmetické přístroje, jde o vysoce bezpečnou metodu ošetření pleti. Výkon je omezen tak, abyste si žádným způsobem nemohli ublížit. Technologie mikroproudu vychází ze stejného základu, jako EMS pulzy. Jedná se o pulzy elektrického proudu, které mají velice specifickou frekvenci a výkon. Mikroproud působí do vrstvy dermis pro podporu elastických vláken. Oproti tomu EMS pulzy mají výkon a frekvenci zvolenou tak, aby pronikly hlouběji až k obličejovým svalům. Aplikační hlavice má důmyslné provedení v podobě válečku. Povrch válečku je stále v kontaktu s pletí i na velmi členitých místech se záhyby. Přístroj nabízí hned dvě stejné aplikační hlavice s válečkovým mikroproudem.

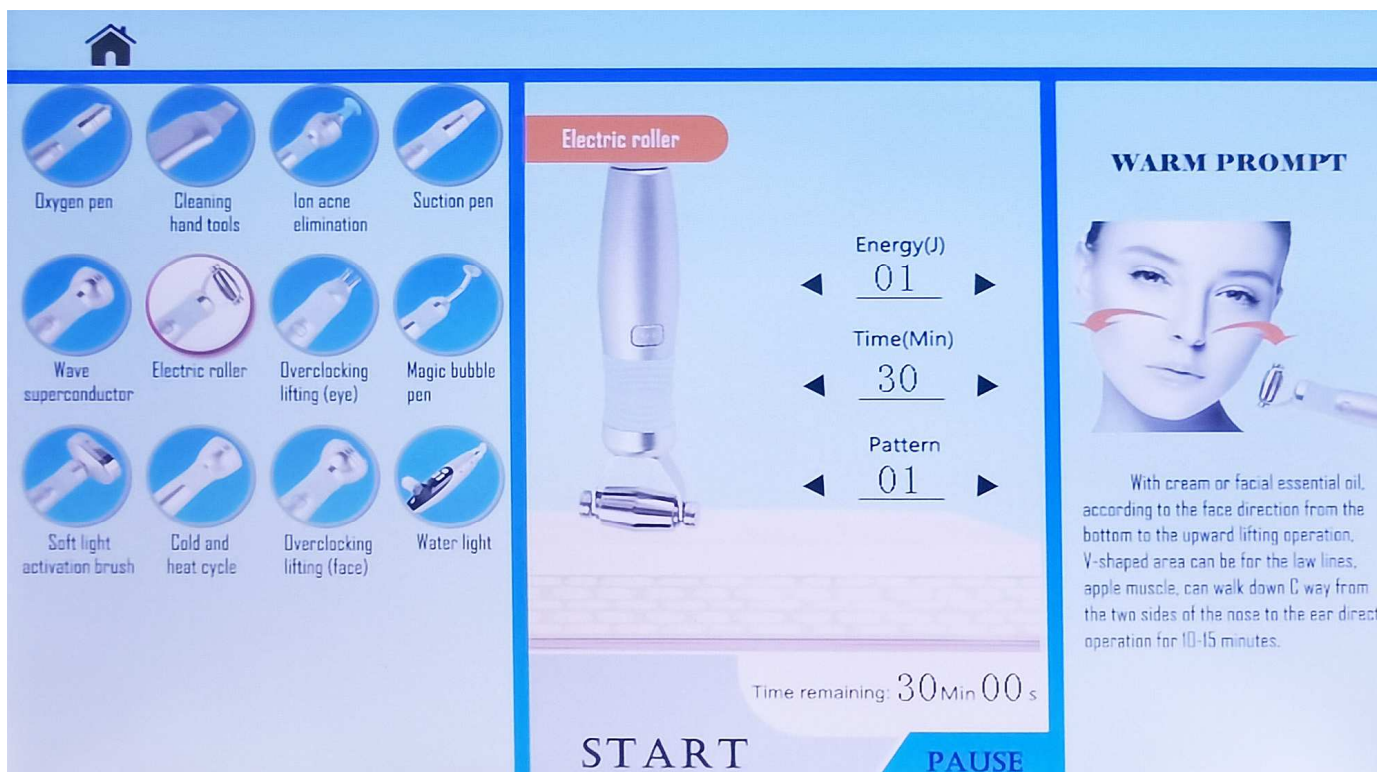


MIKROPROUD

- Funkci mikroproudu snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji.
- Dbejte zvýšenou pozornost s nastavením výkonu. Každá pleť má jinou citlivost. Každý uživatel má jinou tloušťku podkožní tkáně.
- Při použití je třeba vždy aplikovat na pleť v místě použití sonogel. Gel pokožku dostatečně hydratuje a mikroproud se tak může na pleť lépe navázat s maximální účinností.
- Pro využití této technologie je třeba vždy používat oba stejné válečkové aplikátory současně. V okamžiku, kdy jsou oba válečky v kontaktu spleť, uzavře se vodivý okruh mezi pleť a aplikačními hlavicemi.
- Působení mikroproudu je možné vnímat jako pocit mravenčení. Čím větší je nastavený výkon, tím je pocit vjemu mravenčení intenzivnější.
- **ENERGY (J) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit intenzitu působení mikroproudu. K dispozici je celkem **10 úrovní výkonu**. Zvolte si intenzitu, kdy můžete na pleť vnímat působení mikroproudu, ale na druhou stranu je vám použití příjemné.
- **Dbejte zvýšenou pozornost ošetření v oblasti kolem očí. Pokožka je na tomto místě tenká a velmi citlivá. Pokud nastavíte příliš vysokou intenzitu, pocit „tahání“ až „škubání“ svalů může zasáhnout i do očních víček. Na oční víčka přístroj nelze použít.**
- **TIME (MIN) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- **PATTERN (MIN) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit režim působení mikroproudu. K dispozici jsou 3 různé režimy, ve kterých působí pulzy mikroproudu s různou frekvencí. Hlavní účel použití je však vždy stejný. Zvolte si takový režim, který vám na pleť nejvíce vyhovuje.
- Zbývající čas je zobrazen na displeji **TIME REMAINING**.
- Doporučená délka ošetření: 10 až 15 min.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte.

ULTRAZVUKOVÉ VLNY



Aplikátor z ušlechtilé oceli po přiložení na ošetřovanou oblast uvolňuje energii se specifickým výkonem a frekvencí. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Intenzivní zapracování kosmetických přípravků do pleti.

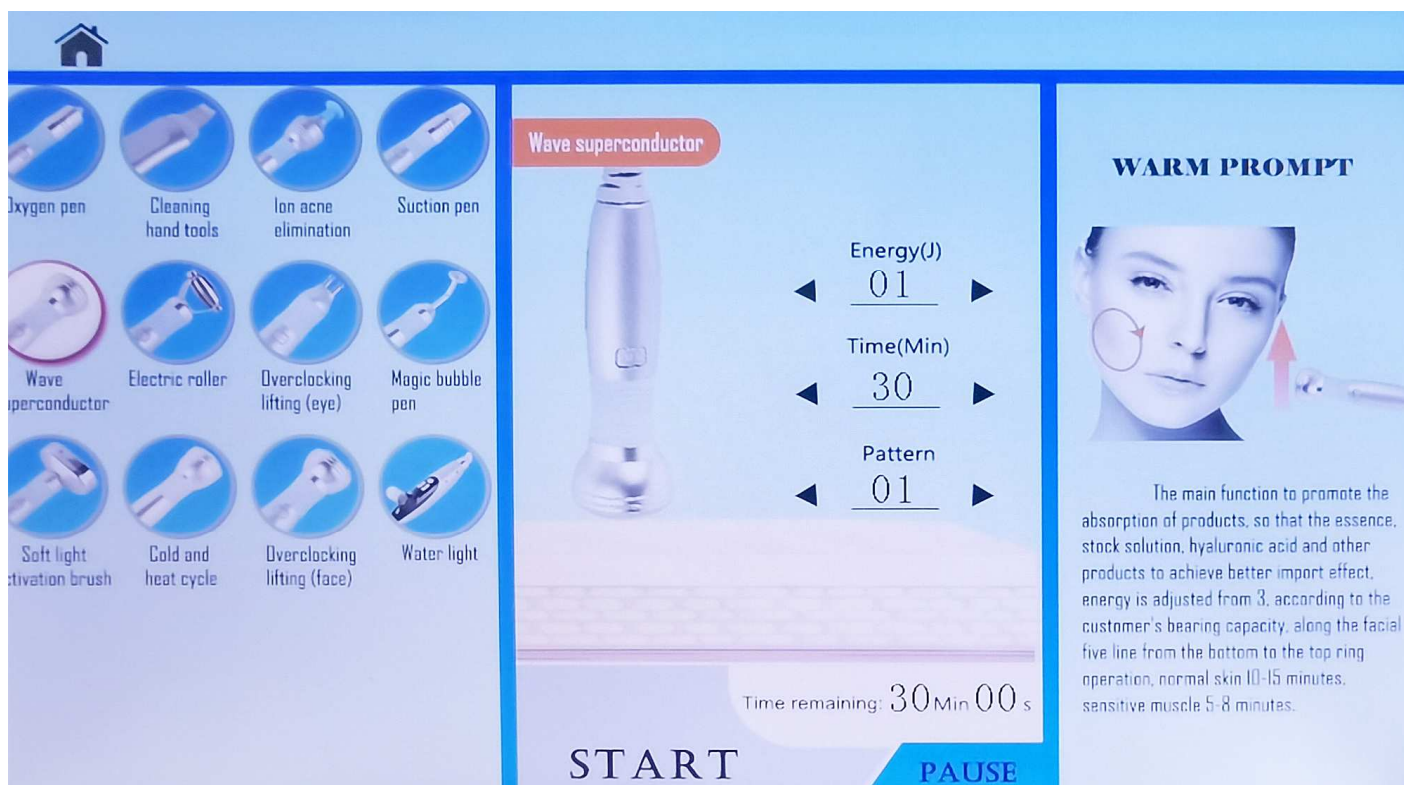

ULTRAZVUKOVÉ VLNY

- Funkci ultrazvuku snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji.
- Aplikační hlavici nepoužívejte na suchou pokožku. Vždy kombinujte se sonogelem nebo jiným kosmetickým přípravkem, který chcete zapracovat a vmasírovat do pleti.
- Působení ultrazvuku můžete vnímat jako pocit mírného brnění na pleti. Působení ultrazvuku si můžete snadno ověřit. Stačí, když na povrch aplikační hlavice nanese pár kapiček vody. Ultrazvuk molekuly vody rozkmitá.
- **ENERGY (J)** < > Pomocí šipek si můžete nastavit intenzitu působení ultrazvuku. K dispozici je celkem **10 úrovní výkonu**. Zvolte si intenzitu, která vám bude na pleti příjemná.
- **TIME (MIN)** < > Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- **PATTERN (MIN)** < > Pomocí šipek si můžete nastavit režim působení ultrazvuku. K dispozici jsou 3 různé režimy, ve kterých působí ultrazvuk s různou frekvencí. Hlavní účel použití je však vždy stejný. Zvolte si takový režim, který vám na pleti nejvíce vyhovuje.
- Zbývající čas je zobrazen na displeji **TIME REMAINING**.
- Doporučená délka ošetření: 5 až 8 min.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte. **START/PAUSE** můžete také aktivovat pomocí tlačítka umístěného přímo na aplikační hlavici.

ELEKTROFORÉZA



Aplikační hlavice pracuje na principu elektroforézy. Kosmetické přípravky jsou penetrovány pomocí působení mikroproudu v přesně optimalizované frekvenci. Žádná část aplikační hlavice nepronikne skrz povrch pleti. Nepředstavuje žádnou zátěž pro váš organismus. Skvělé dosažitelné výsledky. Aplikační hlavice s neinvazivní mezoterapií penetruje kosmetické roztoky přes povrch pleti hluboko do kožních vrstev. Penetrace přírodních extraktů a vitamínů. Aplikační hlavice má v sobě integrovaný zásobník pro opakované naplnění přípravkem na tekuté bázi. Snadné dávkování výkonu. Žádná krev. Žádné modřiny. Žádná bolest. Řekněte stop jehličkám, které způsobují nepříjemné pocity. Metoda mikro-jehličkování je minulost. Neinvazivní mezoterapie pomocí elektroforézy budoucnost, kterou můžete využívat již nyní!



ELEKTROFORÉZA

- Funkci elektroforézy snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji.
- V aplikační hlavici je navíc integrovaná fotonová terapie s černým světlem.
- Při aktivaci světla nemusí mít uživatel ochranu pro oči. Přesto je doporučeno, aby měl oči zavřené. Přizpívá to k maximálnímu komfortu použití.
- Aplikační hlavici je vhodné použít pro zpracování tuhých kosmetických přípravků (krémů, gelů, past).
- Působení elektroforézy můžete vnímat jako pocit mírného brnění na pleti.
- **LUMINANCE** < > Pomocí šipek si můžete nastavit intenzitu působení červeného světla. K dispozici je celkem **10 úrovní výkonu**.
- **STRENGTH (J)** < > Pomocí šipek si můžete nastavit intenzitu působení elektroforézy. K dispozici je celkem **10 úrovní výkonu**. Zvolte si intenzitu, která vám bude na pleti příjemná.
- **TIME (MIN)** < > Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- **PATTERN (MIN)** < > Pomocí šipek si můžete nastavit režim působení elektroforézy. K dispozici jsou 3 různé režimy, ve kterých působí elektroforéza s různou frekvencí. Hlavní účel použití je však vždy stejný. Zvolte si takový režim, který vám na pleti nejvíce vyhovuje.
- Zbývající čas je zobrazen na displeji **TIME REMAINING**.
- Doporučená délka ošetření: 3 až 5 min.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte. **START/PAUSE** můžete také aktivovat pomocí tlačítka umístěného přímo na aplikační hlavici.

ROBOTICKÁ MEZOTERAPIE



Aplikační hlavice je určena pro zpracování tekutých kosmetických přípravků. Přípravek se naplní do skleněné ampulky. Aplikační hlavice je vybavena speciálním čipem, který postupně dávkuje kosmetický přípravek. Můžete si snadno nastavit množství přípravku a rychlost pohybu čipu. Aplikační hlavice je navíc schopna na pleť působit pomocí radiofrekvence a EMS pulzů. Výsledný efekt zpracování kosmetického přípravku je tak okamžitě násoben.



ROBOTICKÁ MEZOTERAPIE


- Funkci robotické mezoterapie snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji.
- Technologie je určena pro vysoce intenzivní zapraování tekutých kosmetických přípravků.
- Intenzivní penetraci zajišťuje kombinace dvou klíčových technologií - radiofrekvence a EMS pulzy.
- Penetraci účinných látek z kosmetického přípravků zajišťuje patentovaný unikátní robotický mechanismus, který kosmetický přípravek „vyšívá“ do pleti. Naprosto neinvazivní cestou, bez bolesti, bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Pomocí tlačítek si můžete snadno nastavit rychlost pohybu robotické aplikační hlavice a množství přípravku, které se má uvolňovat.
- Vysokou efektivitu ošetření pleti umožňuje čtvercový elektronický čip, který je vyměnitelný. Časem ztrácí svoji účinnost a opotřebuje se. Je tedy třeba ho pravidelně měnit. Jakmile i při vysoké intenzitě nastavení radiofrekvence a EMS pulzů cítíte nízkou účinnost na pleti, je třeba čip vyměnit.
- **SYMBOL RF** - Zapnutí nebo vypnutí funkce radiofrekvence. K dispozici je 10 úrovní intenzity.
- **SYMBOL EMS** - Zapnutí nebo vypnutí funkce EMS pulzů. K dispozici je 10 úrovní intenzity.
- **ENERGY (J) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvence a EMS pulzů.
- **TIME (MIN) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- **SPEED < >** Pomocí šipek si můžete nastavit rychlost pohybu robotické hlavice. K dispozici je rozsah od 1 do 9.
- **DOSE < >** Pomocí šipek si můžete nastavit dávkování přípravku od 1 (nejméně) po 10 (nejvíce).
- Zbývající čas je zobrazen na displeji **TIME REMAINING**.
- Doporučená délka ošetření: 10 až 5 min.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte. **START/PAUSE** můžete také aktivovat pomocí tlačítka umístěného přímo na aplikační hlavici.
- Po použití hlavice stiskněte symbol uprostřed displeje vedle obrázku hlavice hned vlevo. Přístroj zahájí proces automatického čištění.

Použití aplikační hlavice s robotickou radiofrekvencí vyžaduje určitou míru cviku a tréninku. Zejména v začátcích, kdy se s přístrojem teprve seznamujete. Nejde jen o to vhodně skloubit nastavení radiofrekvence, EMS pulzů, výkonu, rychlosti pohybu hlavice a dávkování přípravku. Je třeba trochu tréninku si osvojit pohyb hlavice po pleti, aby byla hlavice ve stálém kontaktu s pletí i na místech, kde je větší reliéf a nerovnosti.

TEPELNÁ TERAPIE - PŮSOBENÍ TEPLA A CHLADU



Aplikační hlavice je určena pro zapracování tekutých kosmetických přípravků. Přípravek se naplní do skleněné ampulky. Aplikační hlavice je vybavena speciálním čipem, který postupně dávkuje kosmetický přípravek. Můžete si snadno nastavit množství přípravku a rychlost pohybu čipu. Aplikační hlavice je navíc schopna na pleť působit pomocí radiofrekvence a EMS pulzů. Výsledný efekt zapracování kosmetického přípravku je tak okamžitě násoben.

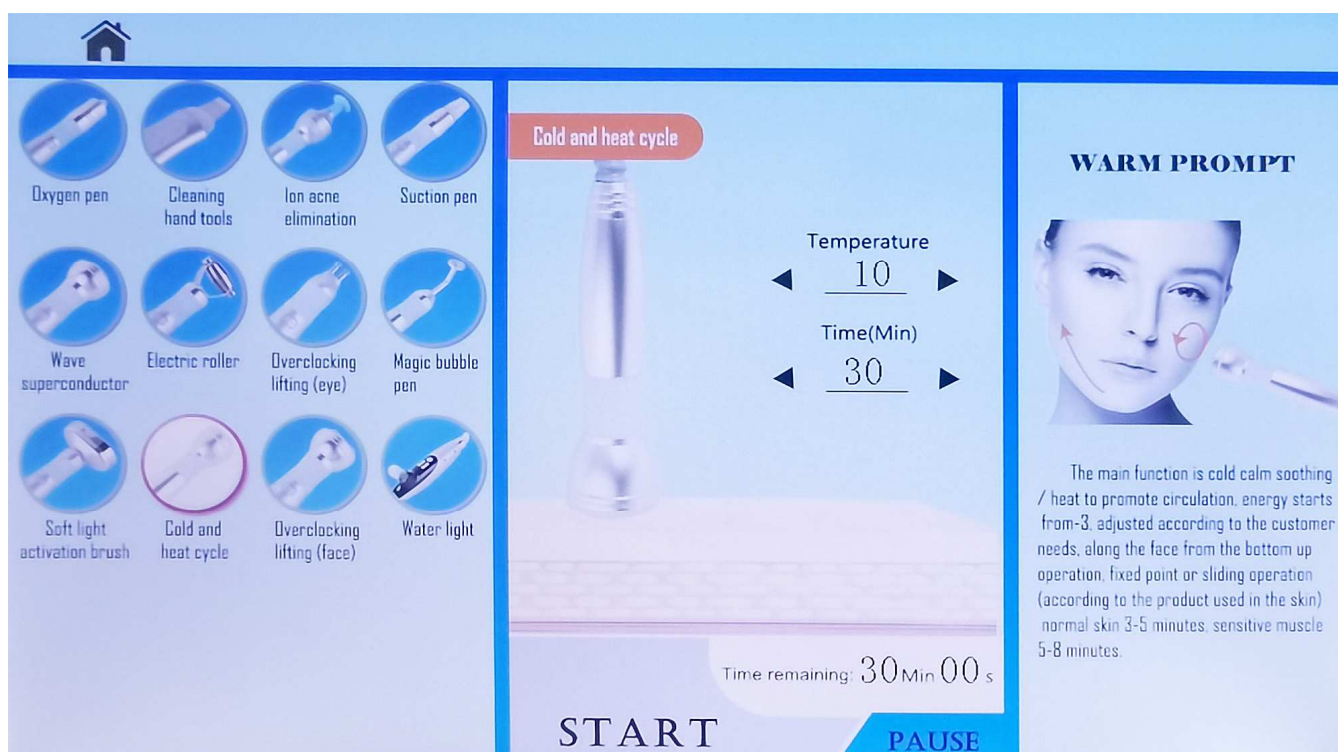

TEPELNÁ TERAPIE - PŮSOBENÍ TEPLA A CHLADU

- Funkci tepelné terapie snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji.
- Aplikační hlavice s tepelnou terapií funguje na principu velmi pokročilého systému, který umožňuje nastavení poměrně širokého teplotního rozsahu téměř v reálném čase bez čekání.
- Uvnitř přístroje je integrovaný zásobník na vodu. Část množství vody je zahřáta a část ochlazena. Podle toho, jakou si nastavíte teplotu na displeji, dochází ke vzájemnému smíchání teplé a studené vody v přesně stanoveném poměru. Takto namíchaná voda proudí pomocí systému kabelů přímo ke kontaktní ploše aplikační hlavice.
- Pro naplnění zásobníku použijte konektory na boční straně přístroje: INJECTION, OVERFLOW, DRAINAGE. Z konektů vyšroubujte krytky a připojte hadičky. Konektor INJECTION slouží pro naplnění vody. Konektor OVERFLOW slouží pro odlití přebytečné vody. Konektor DRAINAGE slouží pro úplné vypuštění vody ze zásobníku. Snažte se vodu pravidelně měnit 1x měsíčně.
- Používejte vždy ideálně destilovanou vodu.
- Pokud se na displeji zobrazí výstraha se žlutým trojúhelníkem s nápisem LACK OF WATER, vypusťte zbývající množství z integrovaného zásobníku. Zásobník naplňte znovu vodou.
- Pleť tak můžete velmi snadno ohřát pro otevření kožních pórů. Další fáze ošetření s pleť jsou tak efektivnější.
- Pleť můžete zároveň velmi snadno zklidnit. Působení chladu kožní póry stáhne. Ochlazení pleti je velmi prospěšné na závěr ošetření pleti. Praktické zejména v zimním období, kdy jsou venku nízké teploty. Pro ochlazenou zklidněnou pleť tak nepředstavuje přechod do mrazu takový šok.
- **TEMPERATURE < >** Pomocí šipek si můžete nastavit teplotu aplikační hlavice. Při nastavení teploty od +10°C do -10°C svítí modrá indikace hlavice. Při nastavení teploty od 36°C do 50°C svítí světelná indikace červeně.
- **TIME (MIN) < >** Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- Doporučená délka ošetření: 3 až 5 min.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte.

RADIOFREKVENCE THERMAGE



Radiofrekvence patří v oblasti estetiky mezi nejúčinnější metodu neinvazivního liftingu pleti. Aplikační hlavice přenáší do pleti radiofrekvenční vlny ve specifické frekvenci. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Přispívá k přirozené tvorbě vlastního kolagenu. V průběhu ošetření je možné na pleti cítit příjemné teplo. Maximální možné zacílení radiofrekvenční energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Účinné zejména pro ošetření zralé pleti s výskytem viditelných hlubokých vrásek. Možnost plynulého dávkování výkonu pro ošetření pleti s různou citlivostí.



RADIOFREKVENCE THERMAGE

- Funkci ultrazvukové špachtle snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji.
- **ENERGY (J)** < > Pomocí šipek si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvence. K dispozici je celkem **10 úrovní výkonu**. Zvolte si intenzitu, kdy můžete na pleti vnímat působení tepla, ale na druhou stranu je vám použití příjemné.
- Při použití je třeba vždy apikovat na pleť v místě použití sonogel. Gel pokožku dostatečně hydratuje a radiofrekvenční vlny se tak mohou na pleť lépe navázat s maximální účinností.
- **TIME (MIN)** < > Pomocí šipek si můžete nastavit čas použití funkce. Nemusíte tak sledovat hodinky. Po uplynutí času se činnost funkce zastaví.
- Zbývající čas je zobrazen na displeji **TIME REMAINING**.
- Doporučená délka ošetření: 10 až 15 min.
- Pomocí tlačítka **START** činnost funkce aktivujete. Pomocí tlačítka **PAUSE** pozastavíte. **START/PAUSE** můžete také aktivovat pomocí tlačítka umístěného přímo na aplikační hlavici.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

- **Estetický přístroj BEAUTYRELAX** je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní provoz je základní předpoklad pro používání přístroje uživatelem v domácím prostředí nebo kosmetickém studiu. Používání přístroje nevyžaduje dohled doktora nebo dermatologa.
- **Estetický přístroj BEAUTYRELAX** je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
- Ošetření pomocí radiofrekvence by mělo být vždy spojeno s čirým vodivým gelem nebo jiným kosmetickým přípravkem na gelové bázi. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Radiofrekvenční vlny získají lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken. Pokud je to jen možné, vyhněte se vodivému gelu s přidanými aromaty nebo barvivy. Pleť citlivějších uživatelů by nemusela zareagovat pozitivně.
- **Pokud budete aplikační hlavičku držet na pleti příliš dlouho v řádech několika sekund a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření (radiofrekvence), přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností. Pokud by nebyl přístroj dostatečně výkonný, nebylo by možné dosáhnout požadovaných výsledků.**
- Pokud je to jenom možné, snažte se aplikační hlavičku vyhnout oblastem s velmi tenkou a citlivou pokožkou. Pokud je menší vrstva podkožního tuku, pracujte s nižšími hodnotami výkonu nebo se této části pleti vyhněte úplně. Je možné, že i s nejnižší úrovní intenzity mohou mít jedinci s velmi citlivou pleť problém a ošetření pro ně bude nepříjemné.
Aplikační hlavičku se po pleti můžete pohybovat různými způsoby. Krátkými táhlými pohyby nebo krátké bodové ošetření – tzv. razítkování. Pokud budete držet hlavičku příliš dlouho v kontaktu s pleť (radiofrekvence), nakumuluje se takové množství energie, které zvýší teplotu aplikátoru. Před dalším přiložením na pleť proto nechte časovou prodlevu v řádu sekund. Zvýšení teploty aplikátoru není závadou přístroje, ale průvodní jev působení radiofrekvenčních vln po delší dobu. Začnějte s krátkým „tukaním“ na pleť a pocitově postupně délku prodlužujte.
- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte aplikační hlavičku. Ideální je použití čirého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavičky.



METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU




ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru

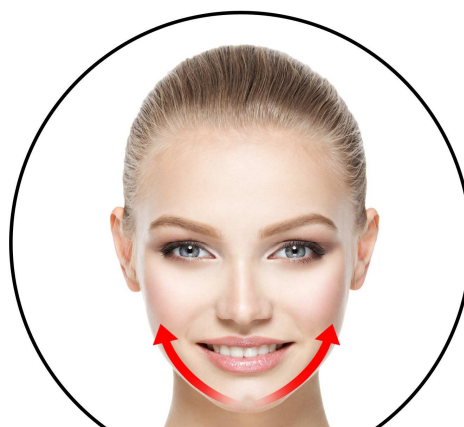

BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

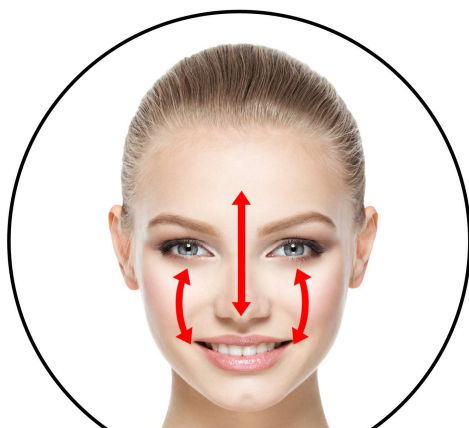

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru


FOTONOVÁ TERAPIE



Terapie fotonovým světlem je v oblasti kosmetického ošetření velmi populární. Ošetření fotonovým světlem nebolí a má velmi dobré výsledky. Kosmetický přístroj s fotonovou terapií BeautyRelax Lightmask Professional poskytuje fotonovou terapii s pokrytím celého obličeje a krku. Během používání je maximálně chráněn váš zrak. Obličejová maska slibuje vysoce komfortní použití ve srovnání s ručními přístroji. Přístroj nemusíte držet v ruce a zároveň světlo pokrývá rovnoměrně celou plochu obličeje. Stálost působení fotonovým světlem je pro úspěšné dosažení výsledků klíčové. Počet LED diod: 192.

TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.

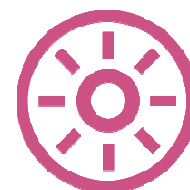

REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

1. Červené světlo

Stimuluje podporu tvorby kolagenu. Kolagen je základní bílkovina, která slouží k obnově poškozených a starých tkání. Zlepšení kvality pleti a zmenšení pórů.

2. Modré světlo

Bakterie v akné obsahují porfyriny. Díky vysoké afinitě s vlnovou délkou je modré světlo schopno porfyriny ničit. Kromě toho má modré světlo zklidňující účinek, který je velmi účinný při přecitlivělosti pleti.

3. Fialové světlo

Kombinuje červené a modré světlo, které má dvě účinné fototerapie. Zejména má dobrý účinek na potlačení příznaků akné.

4. Žluté světlo

Má speciální vlnovou délku 590nm. Podporuje absorbování kosmetických přípravků. Přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu. Zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti. Obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu. Napomáhá zpomalovat stárnutí kůže.

5. Zelené světlo

Zelené světlo napomáhá vyrovnat barevný pigment a redukovat jemné vrásky. Urychluje proces hojení ran. Zesvětluje pleť.

6. Azurové světlo

Zvyšuje buněčnou energii a má příznivé účinky pro celkový metabolismus kožní tkáně.

7. Laserové světlo


Dokáže proniknout hluboko do pokožky. Urychluje metabolismus tkání. Rozkládá barevné skvrny. Zlepšuje vzhled jemných vrásek a stárnutí pleti.

POPIS OVLADAČE MASKY



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Displej | 7. Zvýšení času |
| 2. Snížení výkonu elektrických pulzů | 8. Nastavení intenzity světla |
| 3. Zvýšení výkonu elektrických pulzů | 9. Napájení masky |
| 4. Režim působení světla | 10. Napájení masky |
| 5. Start/výběr světla fotonové terapie | 11. Vstup pro napájecí adaptér |
| 6. Snížení času | |

POPIS MASKY

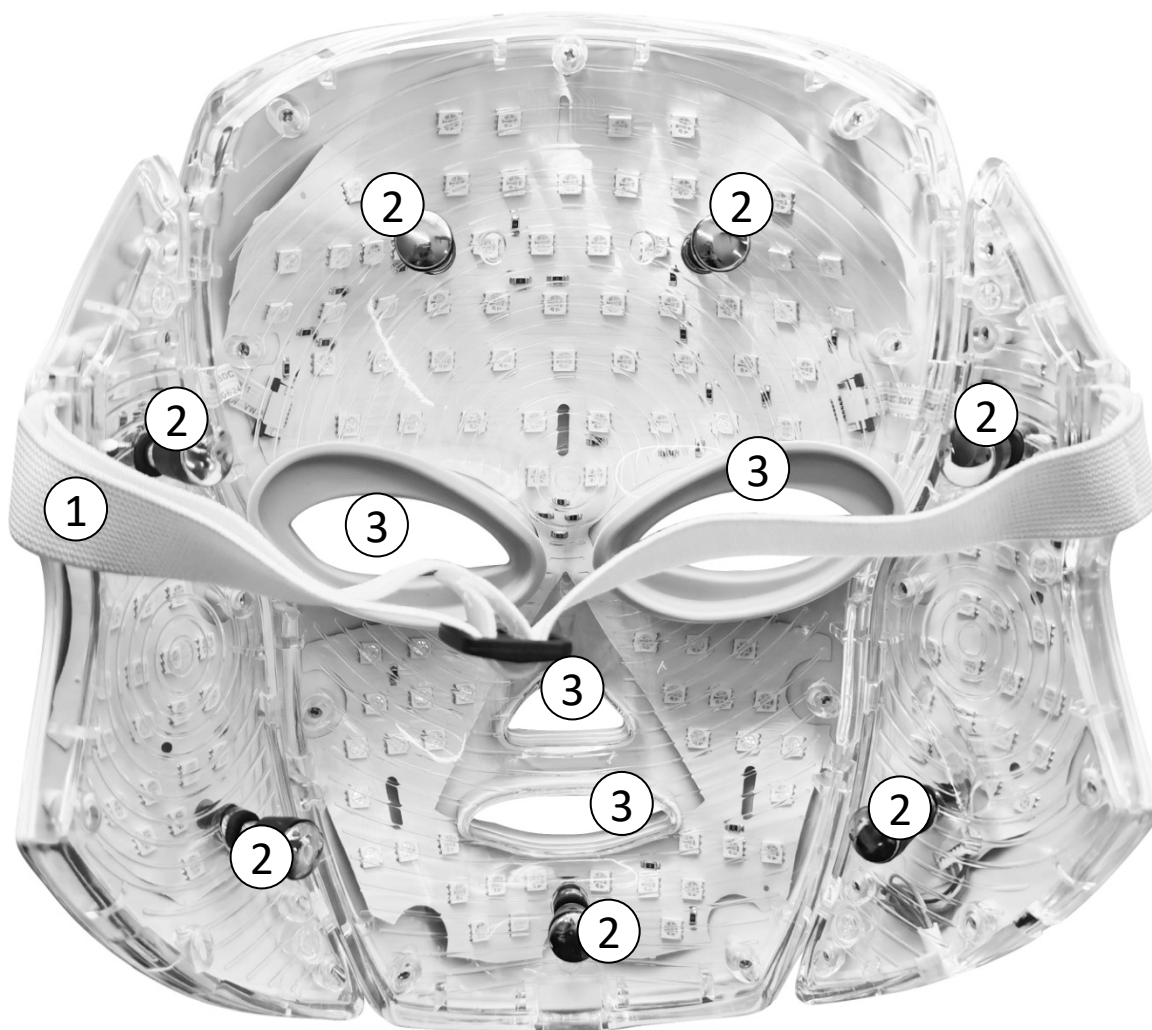

- 1. Stahovací pásek
- 2. Aplikační hlavice elektrických pulzů
- 3. Otvor pro oči, nos a ústa

POUŽITÍ DLE TYPU PLETI

Šetrnost ošetření fotonové terapie umožňuje ošetření všech typů pleti.



normální



suchá



smíšená



mastná



citlivá



aknézní

OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÉ MASKY


- 1.** Před použitím doporučujeme pleť odlíčit od makeupu. Pleť důkladně omyjte a osušte.
- 2.** V případě potřeby můžete nanést váš oblíbený kosmetický krém nebo sérum.
- 3.** Přístroj si nasadte na hlavu tak, aby vám to bylo pohodlné. Můžete si přizpůsobit stahovací pásek, který se umísťuje na temeno hlavy. V případě potřeby můžete k masce připojit druhou menší aplikační část.
- 4.** Pokud to situace vyžaduje, můžete oblast očí překrýt kosmetickými tampónky nebo ubrousky, aby vaše oči nevnímaly okolní světlo a měli jste naprostý komfort použití.
- 5.** Abyste měli při zavřených očích úplnou tmou, využijte textilních brýlí, které jsou součástí balení.
- 6.** V případě využití funkce působení elektrických pulzů instalujte do vnitřní strany masky aplikační kolíčky - 7ks.
- 7.** Masku pro obličej a krk připojte k ovladači. Pořadí není důležité. Můžete libovolně připojit do zdířky (9), (10).
- 8.** Ovladač připojte k napájecímu adaptéru. Využijte zdířku (11) na horní straně ovladače.
- 9.** Přístroj zapnete pomocí tlačítka **ColorSelect/Start (5)**. Dalším stiskem tohoto tlačítka si můžete nastavit barvu fotonového světla.
- 10.** Pomocí tlačítka **Flicker (4)** si můžete nastavit režim působení světelné terapie. Doporučujeme používat mód 1 - stálé kontinuální svícení. Režim blikání světla může působit nepříjemné pocity lidem, kteří jsou více citliví na světlo a trpí např. epilepsií.
- 11.** Pomocí tlačítek **Time (6)(7)** si můžete nastavit čas ošetření. K dispozici je rozsah od 1 do 91 minut.
- 12.** Pomocí tlačítek **Microelectronics(2)(3)** si můžete nastavit intenzitu působení elektrických pulzů. K dispozici je celkem 9 úrovní intenzity výkonu.
- 13.** Pomocí tlačítka **Brightness** si můžete nastavit intenzitu působení světla. K dispozici je celkem 9 intenzit.
- 14.** Průměrná délka použití masky se pohybuje od 15 do 30 minut.
- 15.** Po skončení použití přístroje jej vypněte vytažením adaptéru z ovladače nebo zásuvky.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Se zásobníky na vodu pracujte vždy, když je přístroj vypnutý. Používejte destilovanou nebo kojeneckou vodu. Voda nesmí obsahovat žádné mechanické částice. Vodní kámen by způsobil zanesení systému cirkulace vody a poškození přístroje. Platí pro zásobníky A B C D a pro hlavní zásobník na vodu s modrým podsvícením. Vizually zkontrolujte, zda není odpadní nádoba příliš plná. Zásobníky se instalují pomocí závitů. Utahujte s citem, aby nedošlo ke stržení závitů. S vodou vždy manipulujte mimo dosah přístroje, aby se v případě nehody nedošlo k zasažení přístroje vodou.
2. Jakmile dokončíte proces naplnění zásobníku nebo vyprázdnění odpadního zásobníku, zkontrolujte, zda se na přístroji nenachází případné kapky vody. Pečlivě je osušte. Stejně tak vizuálně ověřte, zda po použití některé z aplikačních hlavíc využívající vodu není tělo přístroje potřísněno vodou. Vždy pečlivě osušte do sucha.
3. Do ampulky v aplikační hlavici s funkcí robotické mezoterapie můžete k vodě přimíchat případný koncentrát, který obsahuje vitamíny pro výživu pleti libovolné značky (sérum, kyselina hyaluronová, vitamíny v tekutém stavu). Použijte pouze malé množství. Přidaný přípravek nesmí nikdy změnit hustotu vody. Došlo by k ucpání elektronického čipu.
4. Přístroj zapnete stisknutím hlavního tlačítka na zadní straně hlavní jednotky do polohy 1. Displej přístroje se rozsvítí. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Můžete začít s přístrojem pracovat. Vždy dbejte na to, aby se při použití aplikačních hlavíc nedostala vlhkost do prodlužovacího kabelu pro napájení přístroje.
5. Všechny funkce přístroje ovládejte pomocí dotykového barevného displeje. Každou aplikační hlavici můžete zapnout nebo vypnout pomocí příslušného symbolu na displeji. Vždy můžete používat pouze jednu funkci. Není možné mít současně spuštěných více technologií. Výkon nastavujte postupně.
6. Pro všechny technologie si můžete nastavit čas ošetření. U vybraných aplikačních hlavíc si můžete nastavit výkon dle individuálních potřeb.
7. Při nastavení parametrů pro aplikační hlavici s vodní dermabrazí je třeba dostat do rovnováhy množství vody, které se načerpává do aplikační hlavice a výkon působení vakua. Vody by nemělo být příliš málo, ale zároveň ne příliš mnoho, aby nestékala po pleti.
8. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka na zadní straně do polohy 0.
9. Vždy věnujte zvýšenou pozornost, aby nebyly zakryty průduchy větrání přístroje na zadní straně přístroje.
10. **V rámci udržení co nejdelší životnosti přístroje doporučujeme po skončení používání aplikační hlavice ponechat přístroj v pohotovostním režimu alespoň v délce 10 minut. Zapnuté chlazení přístroje má tak dostatečný časový prostor přístroj plynule ochladit.**

ČAS OŠETŘENÍ

Délku ošetření pleti nelze stanovit s přesností na vteřiny podle předem definovaných tabulek. Délka ošetření pleti pomocí technologií přístroje výrazně závisí na více faktorech - stavu pleti, věku uživatele, typu pleti, citlivosti pleti nebo způsobu, jakým se uživatel dlouhodobě o pleť stará. V obecné rovně platí, že by při naprosto prvním použití mělo ošetření trvat řádově v jednotkách minut. Při úvodním použití lze postupně sledovat, jakým způsobem pleť reaguje na působení dané technologie a podle toho upravit úroveň nastavení výkonu tak, aby bylo pro uživatele ošetření komfortní. Délka ošetření by měla také zohlednit rozsah plochy vybrané partie. Celé plocha obličeje zabere delší čas, než například pouze koutky úst nebo stimulace vlásečnicových vrásek kolem očí.

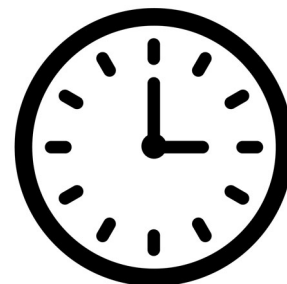

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU

- Pokud používáte přístroj pro komerční účely, věnujte zvýšenou pozornost péči o aplikační hlavice.
- Po každém klientovi je třeba očistit hlavice, které jste používaly. Zejména části aplikátoru, které byly v kontaktu s pleť klientů. Pro dezinfekci použijte roztok nebo sprej a bázi alkoholu. Doporučujeme používat hygienické textilní ubrousky, které jsou již napuštěny látkou pro dezinfekci. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do vnitřního prostoru aplikátoru. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost.
- Pravidelně kontrolujte stav tekutiny v odpadní nádobce. Obsah průběžně vyprazdňujte. Vždy propláchněte vlažnou vodou. V ideálním případě vnitřní stranu zásobníku ošetřete pomocí spreje s alkoholovým roztokem. Zabráníte tak množení bakterií v odpadní nádobce. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, všechny zásobníky na vodu vyprázdněte.
- V přístroji je integrovaný zásobník na vodu, který je určen pro správný provoz funkce tepelné terapie. Vodu v zásobníku pravidelně vyměňujte. Minimálně ve frekvenci 1x do měsíce.
- Pokud je pleť klientů postižena kožním onemocněním nebo je poraněna, není možné klientů přístrojem ošetřit.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jaké výsledky mohou očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleť promítne?

Následné projevy na pleti po ošetření radiofrekvencí jsou velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. Obecně lze říci, že bezprostředně po ošetření je pleť mírně zarudlá. Penetrací vlhkosti sonogelu může působit vizuálně svěžím dojmem. Na pleti, kde došlo ke stimulaci pomocí aplikační hlavice, dochází k okamžitému lokálnímu zvýšení teploty. Přesto je však třeba dát pleti prostor v řádu hodin, kdy dojde k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za míru pružnosti pleti. Neinvazivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces. Je třeba plet průběžně takto stimulovat (v průměru 3x až 4x do měsíce). Při ukončení pravidelného ošetření pleti se pleť opět postupně vrací do původního stavu. Minimální rozestup mezi ošetřeními stejné partie doporučujeme minimálně týden.



Jakým způsobem je možné působení radiofrekvence vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pletí proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis proud radiofrekvenčních vln. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přímé zacílení na vrstvu dermis o specifické frekvenci a výkonu.

Může aplikační hlavice s radiofrekvencí povrch pleti poranit?

Rozhodně ano. Rozsah výkonu přístroje je záměrně upraven tak, aby byl schopen ošetřit celé spektrum uživatelů s různou citlivostí pleti a různou vrstvou tukové tkáně. Jedna z hlavních výhod přístroje je flexibilita použití se zaměřením a vybrané partie těla. Úprava dávkování výkonu umožňuje ošetření i velmi citlivých partií. Vyšší výkon naopak pro větší plochy, kde je míra citlivosti menší. Pokud by přístroj nenabízel dostatečný rozsah výkonu, nebylo by možné ho považovat v oblasti estetických přístrojů za efektivní univerzální nástroj pro lifting pleti. Proto je třeba při nastavení výkonu postupovat s maximální opatrností.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Přístroj není zdravotnický prostředek. Přístroj neléčí žádné kožní onemocnění. Patří do kategorie masážních a estetických přístrojů. Přístroj nabízí ověřenou technologii radiofrekvence, která významným způsobem přispívá ke zlepšení kondice unavené a nezdravě vyhlížející pleti.

Představuje ošetření pomocí estetického přístroje nějaké následné omezení klienta?

Po dokončení ošetření pleti může pokožka mírně zarudnout. Tento efekt je způsoben stimulací krevního oběhu a lymfatického systému obličeje. Zbarvení v rádech minut (až hodin v případě intenzity pleťového ošetření) opadne a pokožka se dostane do normálu. Ošetření pleti vodní dermabrazí se někdy označuje jako procedura na obědovou pauzu. Společensky vás nebude následně výrazně limitovat.

Mohu při ošetření pleti přístrojem cítit na pleti nepříjemné pocity až bolest?

Každá z technologií působí na pleť jiným způsobem. Každou aplikační hlavici můžeme vnímat jinak. Při použití radiofrekvence je jako průvodní jev teplo. Při vodní dermabrazii můžete na pleti vnímat působení podtlaku a cirkulaci vody. Plasmové toky můžete na pleti cítit jako mírné štípání. Při

ošetření pleti elektroforézou mírné brnění. Stejně tak při použití mikroproudu můžete vnímat pulzování na pleti. U většiny těchto technologií je možné nastavit výkon. Hlavním smyslem nastavení výkonu je pocit vjemu na pleti. Daná technologie musí být na pleti cítit, ale zároveň nesmí její působení překročit míru snesitelnosti.

Použití obdobného přístroje je pro mě něco absolutně nového. Jak mám ze začátku přistupovat k použití přístroje?

Podrobně si prostudujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Nikam nespěchejte. Začněte s ošetřením pleti pomalu. Působení jednotlivých aplikátorů si postupně vyzkoušejte. Pohybujte se na různých místech obličeje. Vnímejte, jak se na konkrétních místech projevují jednotlivé technologie. Vyzkoušejte pohyb hlavice. „Vytvářejte“ na pleti čárky, kolečka. Osvojíte si tak, jaká technika pohybu je pro vaši pleť optimální. Měňte postupně tempo pohybu a rychlost. Vyzkoušejte si se zvýšenou opatrností další stupně výkonu.

Jaký je důvod péče o aplikační hlavici po každém použití?

Kontaktní hlavici je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu (aplikační hlavice s radiofrekvencí). Aplikační hlavici dezinfikovat po každém jednotlivém použití. Ideálně pomocí spreje na bázi alkoholu. Zabráníte tak možnosti šíření bakterií a zajistíte maximální hygienu provozu. Aplikační hlavici nezapomeňte důkladně vysušit pomocí hadříku.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Je přístroj vodotěsný?

Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod proudem tekoucí vody. Neplatí pro vyměnitelné aplikátory vodní dermabraze a ampulku se zásobníkem na tekutinu pro hydratační pistoli. Neplatí také pro zásobník tekutiny a odpadní nádobku. Pokud je chcete propláchnout pod proudem tekoucí vody, vždy je nezbytně nutné je z přístroje vyjmout.

PÁR VĚT ZÁVĚREM

Provoz kosmetického a estetického studia je velmi náročný. Aby vše fungovalo hladce a plynule, záleží na celé řadě faktorů. Klade velmi vysoké nároky především na přístrojovou techniku. Nejen z hlediska dlouhé životnosti, kvality, ale především vhodnou kombinací technologií. Zákazníci očekávají profesionální pleťové ošetření v té nejvyšší kvalitě. Přístrojové vybavení musí umět nabídnout nejen vhodnou kombinaci různých metod ošetření pleti, ale zároveň musí být nastavení jednotlivých funkcí přístroje velmi variabilní z hlediska dávkování výkonu. BeautyRelax OXYGEN PROFESSIONAL CLINIC PERFORMANCE je přístroj, jehož návrh a konstrukce přímo vychází ze záměru ošetřit velké množství zákazníků různých požadavků s různými typy pleti. Nabídne vše, na co jen pomyslíte. Přístroj disponuje hned třemi metodami čištění pleti: vodní dermabrazí, ultrazvukovou špachtlí a plazmovou terapií s ozonem. Kosmetické přípravky ve všech podobách mohou být zapracovány hned pomocí několika metod: ultrazvukem, mezoterapií s elektroforézou a robotickou mezoterapií. Pleť získá okamžitou vláhu díky nano hydrataci nebo proudem vody obohacený o kyslík. Působení tepelné terapie pleť skvěle připraví na další kosmetické procedury a v závěru příjemně zklidní. Obličejová maska s fotonovou terapií umožní načerpat výhody fotonového světla. Pokud chcete zapomenout na veškeré starosti ohledně přístroje a chcete se koncentrovat pouze a jen na kvalitní péči o vaše klienty, model BeautyRelax OXYGEN PROFESSIONAL CLINIC PERFORMANCE bude skutečným partnerem ve vašem podnikání!



www.beautyrelax.cz

Martin Hrbek

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Estetický přístroj pro ošetření pleti

BeautyRelax OXYGEN PROFESSIONAL CLINIC PERFORMANCE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-3032**

EAN **8594166123236**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019

Produkt není zdravotnický prostředek. Není určen k léčbě žádného onemocnění.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno
Datum vydání: 1.2.2023


SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
... DIČ: CZ29195454 • Tel.: 737 466 160 ...
Martin Hrbek, jednatel