

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj pro lifting pleti
BeautyRelax BR-2794

FRAXLIFT ELEGANCE



OBSAH:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
ÚČEL POUŽITÍ	6
KONTRAINDIKACE	6
HLAVNÍ VÝHODY	7
CO MŮŽETE OČEKÁVAT	7
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
OBSAH BALENÍ	7
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ SONOGELU	8
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	8
RADIOFREKVENCE, INFRAČERVENÉ SVĚTLO, ČERVENÉ SVĚTLO	9
POPIS PŘÍSTROJE	10
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	11
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	12
MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ	13
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	14
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	15
NABÍJENÍ BATERIE	16
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	17
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	17
CERTIFIKACE	17
DOVOZCE	17
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	18

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- BeautyRelax je přístroj z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod horní vrstvu pokožky. Přístroj není zdravotnický prostředek.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny evropské normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Ošetření je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Radiofrekvenční vlny získají lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken.
- Při ošetření vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu 1 až 2 sekundy (tzv. razítkování). Technologie podle typu ošetření pleti působí vždy, když aplikátor přístroje přiložíte k pleti. Začínáte na nejnižší nastavené hodnotě **LOW**. Postupně můžete přejít i na vyšší hodnotu **HIGH**. Ošetření pleti by nikdy nemělo být nesnesitelně bolestivé. Podle toho se snažte přizpůsobit délku kontaktu aplikátoru s pletí. Akceptovatelné je pouze jemné mravenčení až lehké štípnutí. Každá část obličeje by neměla být ošetřena při jednom použití více než dvakrát.
- Pokud budete aplikační hlavici držet na pleti příliš dlouho a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření, přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností.
- Počet opakování ošetření je velice individuální. Záleží na věku a stavu pokožky. Ideální je jednou, maximálně dvakrát do týdne. Pleť a zejména oblast dermis potřebuje čas pro autonomní proces regenerace. Rozhodně neplatí pravidlo - čím častější používání, tím lepší dosažitelné výsledky. Stejně tak neplatí, čím větší výkon, tím rychlejší a lepší výsledek. Pleť každého z nás je orgán s individuálním stupněm citlivosti. Pro někoho může být střední hodnota výkonu již výrazně bolestivá, někdo nemá problém při delším ošetření snést nejvyšší výkon.
- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte aplikační hlavici. Ideální je použití čirého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavice.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: mh@santadria.cz
- Přejeme vám hodně úspěchů ve vašem úsilí ke zdravější a krásnější pleti.
Tým BeautyRelax.cz



UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
- **Přístroj není zdravotnický prostředek.**



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

Ošetření pleti frakční multipolární radiofrekvencí (FMR) představuje naprostou špičku v oblasti neinvazivního liftingu pleti. Nejúčinnější technologie pro omlazení pleti bez podstoupení chirurgického zákroku. Kosmetický přístroj BeautyRelax je určen pro nejnáročnější klienty. Neexperimentujte. Pečujte o svoji pleť na profesionální úrovni!

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (neplatí pro zubní implantáty a další typy náhrad v dutině ústní)
- Cévní poruchy nebo arterioskleróza
- Těhotenství
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy



HLAVNÍ VÝHODY

- Neinvazivní ošetření (přístroj neproniká přímo skrz pokožku).
- Ošetření bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Vysoká užitná hodnota přístroje nabízí pro ošetření pouze moderní technologie.
- Při pravidelném používání dosažitelné účinky neinvazivní rejuvenace pleti.
- Optimalizovaný výkon pro maximální účinek při zachování šetrnosti k pleti.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

- Zjemnění hlubokých i jemných mimických vrásek.
- Zvýšení pružnosti pleti.
- Dosažitelný liftingový efekt.
- Vyrovnání jizviček a nerovností pleti.
- Zvýraznění charakteristických kontur obličeje.
- Potlačení strií a jizviček.
- Omlazený a prozářený vzhled.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Technologie FMR (frakční multipolární radiofrekvence), vibrace.
- Nastavený úroveň výkonu: nízká, střední, vysoká
- Radiofrekvence: 1MHz.
- Frekvence radiofrekvence: 1MHz.
- Červené světlo: vlnová délka 625nm
- Infračervené světlo: vlnová délka 590nm
- Napájení: vestavěná Li-ion baterie.
- Nabíjení baterie: pomocí USB kabelu se síťovým adaptérem.
- Rozměry: 16x4x4cm
- Hmotnost: 170g

OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax.
- Stojánek.
- Napájecí adaptér.
- Sada kosmetických hadříků.
- Návod k obsluze.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

- Nové technologie 21. století
- Technologie FMR, infračervené teplo
- Přímé zacílení na remodelaci kolagenových a elastických vláken
- Určeno pro všechny typy pleti bez omezení
- Neinvazivní ošetření (žádná část aplikátoru nepronikne skrz pokožku)
- Opakovatelné ošetření v pohodlí domova
- Samotné ošetření zabere pouhých několik minut
- Skutečně účinné řešení určeno pro zralou a unavenou pleť
- Neinvazivní lifting na stejné úrovni jako v estetickém studiu
- Certifikovaný přístroj
- Naprosto bezpečné používání při dodržení bezpečnostních doporučení
- Aplikace nezatěžuje žádným způsobem organismus
- Určeno pro obličej, krk a dekolt
- Bezdrátové používání (napájení pomocí nabíjecí baterie)
- Neinvazivní ošetření (přístroj neproniká přímo skrz pokožku)
- Ošetření bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Vysoká užitná hodnota přístroje nabízí pro ošetření pouze moderní technologie
- Při pravidelném používání dosažitelné účinky neinvazivní rejuvenace pleti
- Optimalizovaný výkon pro maximální účinek při zachování šetrnosti k pleti
- Zjemnění hlubokých i jemných mimických vrásek
- Zvýšení pružnosti pleti
- Dosažitelný liftingový efekt
- Zvýraznění charakteristických kontur obličeje
- Omlazený a prozářený vzhled
- Napájení: nabíjecí li-ion baterie
- Rozměry: 16x4x4cm
- Hmotnost: 170g

POUŽITÍ SONOGELU

Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení). Aplikací gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Radiofrekvenční vlny tak mohou do pleti lépe pronikat.

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Nový kosmetický přístroj pro lifting pleti z úspěšné série modelů Fraxlift. Varianta Fraxlift Elegance je skvělá kombinace kompaktního provedení a vysoké účinnosti FMR technologie. Doplnková funkce infračerveného tepla. Zvýraznění charakteristických kontur obličeje. Omlazený a prozářený vzhled. Přímé zacílení na kolagenní a elastická vlákna s maximální šetrností k vaší pleti. Zpomalte proces stárnutí pleti a dopřejte jí profesionální péči na špičkové úrovni!

RADIOFREKVENCE

BeautyRelax Fraxlift Smart využívá pokročilou technologii multipolární radiofrekvence. Aplikátor nabízí unikátní rozmístění 18 elektrod (pinů). Aplikátor ve vybraných lokalitách dodá do podkožní vrstvy radiofrekvenční energii s optimálně zvoleným výkonem a vhodnou intenzitou „shotů“ (časová charakteristika mezi pulzem a prodlevou). Přenos energie je zprostředkován sadou elektrod (pinů), uspořádaných do maticové sestavy. Průměrná délka ošetření se odvíjí v závislosti na velikosti ošetřované plochy. Samotné ošetření je naprosto snadné a intuitivní. Probíhá formou „razítkování“ obličeje. Díky tomu můžete ošetřit kompletně celou oblast obličeje bez vynechání volných mezer.

INFRAČERVENÉ SVĚTLO vlnová délka 590nm


Dokáže proniknout hluboko do pokožky. Urychluje metabolismus tkání. Rozkládá barevné skvrny. Zlepšuje vzhled jemných vrásek a stárnutí pleti. Podporuje krevní oběh a látkovou výměnu. Na aplikační hlavici jsou umístěny 3 světla v horní části a 3 světla v dolní části displeje.

Poznámka: infračervené světlo není vidět zrakem člověka. Pokud si chcete ověřit, zda světlo v této vlnové délce funguje, můžete se na aplikační hlavici přístroje podívat skrze displej mobilního telefonu v režimu focení nebo natáčení videa. LED dioda se rozsvítí mírně červenou barvou.

ČERVENÉ SVĚTLO vlnová délka 625nm

Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu. Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků. Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni. Brání v tvorbě pigmentu.

-  Diody s funkcí **infračerveného světla**
-  Diody s funkcí **červeného světla**

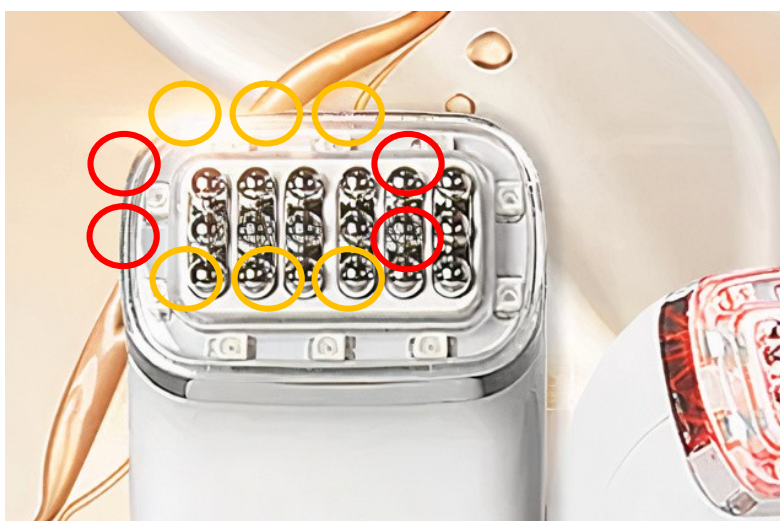

POPIS PŘÍSTROJE

1. Diody infračerveného světla
2. Kontaktní plochy aplikační hlavice pro přenos radiofrekvence
3. Světelný indikátor **LOW** – nízká úroveň výkonu radiofrekvence
4. Světelný indikátor **MEDIUM** – střední úroveň výkonu radiofrekvence
5. Světelný indikátor **HIGH** – vysoká úroveň výkonu radiofrekvence
6. Indikace zapnutí přístroje
7. Tlačítko **ON/OFF**
8. Tlačítko **INFRAČERVENÉ SVĚTLO**
9. Tlačítko **RADIOFREKVENCE**
10. Stojánek
11. Kontaktní vodící pásek



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před každým použitím je třeba důkladně omýt pokožku. Ideální je načasovat si ošetření po koupeli. Nepoužívejte příliš horkou vodu. Pleť musí být pouze příjemně zahřátá. Teplá voda navíc otevře a uvolní kožní póry. Pleť se stane vláčnější pro přístrojové ošetření. Před použitím přístroje neaplikujete na pleť žádné kosmetické přípravky nebo séra.
2. Na ošetřovanou partii naneste jemnou vrstvu čirého aplikačního gelu. Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikační hlavicí a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavicí. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Přístroj bez pojivé látky mezi pleť a aplikátorem nedoporučujeme.
3. Přístroj zapnete krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Přístroj se zapne do pohotovostního režimu. Svítí oranžový indikátor.
4. Stiskněte tlačítko **INFRARED**. V oblasti aplikační hlavy se aktivují diody s infračerveným světlem. Infračervené světlo není vidět zrakem člověka. Pokud si chcete ověřit, zda světlo v této vlnové délce funguje, můžete se na aplikační hlavicí přístroje podívat skrze displej mobilního telefonu v režimu focení nebo natáčení videa. LED dioda se rozsvítí mírně červenou barvou. Aktivaci infračerveného světla doprovází zelená signalizace u tlačítka.
5. Pomocí tlačítka RF si můžete nastavit výkon působení radiofrekvence. K dispozici jsou 3 úrovně – **nízká, střední, vysoká**. Na ovládacím panelu jsou hodnoty výkonu zobrazeny jako **LOW, MEDIUM, HIGH**. Nastavte si takovou úroveň výkonu, která vám na pleti nejvíce vyhovuje. Při nastavení výkonu **HIGH** dalším stiskem tlačítka RF funkci radiofrekvence vypnete.
6. Při vyšším výkonu může povrch aplikační hlavy dosahovat vyšších teplot, než při nižším výkonu. Pokud během používání přístroje dosáhne teplota aplikační hlavy vysoké teploty, nechte ji vychladnout a pokračujte dále v ošetření. Zahřátí hlavy není závada. Jedná se o průvodní jev působení radiofrekvence.
7. Ošetřete postupně vybranou část obličeje. Při ošetření vždy postupujte tak, že aplikační hlavicí přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu několika sekund (tzv. razítkováním). Začínáte na nejnižší nastavené hodnotě **LOW**. Intenzitu můžete postupně zvyšovat podle pocitu. Ošetření pleti by nikdy nemělo být nesnesitelně bolestivé. Podle toho se snažte přizpůsobit délku kontaktu aplikátoru s pletí. Akceptovatelné je pouze jemné mravenčení až lehké štípnutí. S přístrojem se můžete samozřejmě také pohybovat po pleti. Vždy je třeba, aby byla kontaktní plocha aplikátoru v plném kontaktu s pletí. Čím rychleji se budete pohybovat, tím budete vnímat pocitově výkon a teplo méně. Pokud zpomalíte nebo dokonce zastavíte, působení radiofrekvenčních vln bude gradovat na jednom místě. Působení radiofrekvence tak bude v daném místě velmi intenzivní. Najděte se tedy správný poměr mezi výkonem a rychlostí pohybu aplikátoru po pleti.
8. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - v průběhu použití přístroje musí být vaše prsty umístěny na obou vodících páscích na boční straně přístroje a to v jeden moment současně. Uzavře se tak okruh mezi vámi a přístrojem. V opačném případě nebude funkce radiofrekvence pracovat.**
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.
10. Po skončení používání přístroje pleť otřete od sonogelu. Použijte popřípadě krém nebo sprej pro hydrataci pleti. Během spánku bude vaše pleť regenerovat. Hydratace významně přispěje k rychlejšímu průběhu rekonvalescence pleti.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Údaj o délce kontaktu s pletí je čistě informativní. Délku kontaktu aplikační hlavice s pletí si regulujete sami dle vlastního pocitu. Na obličeji jsou oblasti s různou vrstvou podkožního tuku a citlivostí pleti. Působení radiofrekvenčních vln tak můžete vnímat na různých místech odlišně.
2. Vždy při kontaktu aplikační hlavice vnímejte teplo, které je průvodním jevem působení radiofrekvenčních vln. S aplikační hlavicí můžete zůstat stát na jednom místě nebo se po vybrané části obličeje pohybovat.
3. Při používání přístroje se vždy snažte, aby se aplikační hlavice nacházela v plném kontaktu s pletí. Ošetření pleti tak bude maximálně efektivní.
4. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - v průběhu použití přístroje musí být vaše prsty umístěny na obou vodících páscích na boční straně přístroje a to v jeden moment současně. Uzavře se tak okruh mezi vámi a přístrojem. V opačném případě nebude funkce radiofrekvence pracovat.**
5. Během jednoho ošetření pleti můžete jednotlivé úrovně výkonu střídat. Snažte se zaměřit nejvíce problematické oblasti (jemné vrásky na čele, metličkové vrásky kolem očí, mimické vrásky, zvýraznění kontur, zjemnění linek na krku, atd.). Na oblastech, kde se nachází jemná citlivá pleť, použijte nižší výkon. Na oblasti s vyšší tukovou vrstvou použijte vyšší výkon.
6. **Upozornění:** Při prvním kontaktu s pletí mějte vždy zapnutou nízkou úroveň **LOW**. Aplikátor přiložte na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již ošetření nepříjemné až mírně bolestivé, nastavte zpět nejnižší úroveň **LOW** nebo ošetření ukončete.
7. **Tip:** Ošetřená partie by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Multipolární radiofrekvence bude mít lepší možnost proniknout do podkožní tkáně.
8. V průběhu použití se vždy snažte, aby byly v ideálním případě všechny kontaktní piny aplikační hlavice v kontaktu s pletí. Ošetření tak bude maximálně efektivní.
9. **Doporučení:** Ošetřenou pleť nevystavujte v délce minimálně 3 dnů příliš horké vodě. Pokožka prochází po ošetření stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.
10. V průběhu ošetření není třeba používat ochranné brýle. Pouze doporučujeme vyhnout se stálému a trvalému pohledu do zdroje světla. Vaše oči by intenzivní červené světlo výrazně unavilo.

MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ



METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

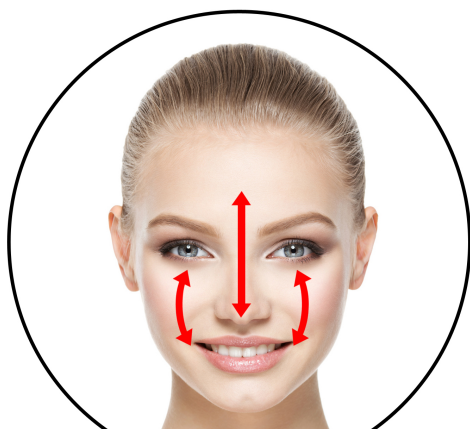

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro ošetření jednotlivými technologiemi přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu ideálně vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.



Jaké výsledky mohou očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleti projeví?

Účinek radiofrekvence je velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. Zarudnutí pleti po ošetření může nastat a jedná se o průvodní jev. Pokožka je po skončení ošetření na povrchu teplejší. V následujících dnech dochází postupně k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za kvalitu pružnosti pleti. Neinvazivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces s definitivním efektem. Pleť je třeba pravidelně stimulovat (přibližně 2x až 4x do měsíce). Další přístrojové ošetření stejné partie doporučujeme minimálně za 7 až 10 dní.

Jakým způsobem je možné působení radiofrekvence vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pletí proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis radiofrekvenční vlny. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přesné zacílení do vrstvy dermis o specifické frekvenci a výkonu. Můžete vnímat pocit kombinace působení tepla a mravenčení na pleti.

Proč je výrazný cenový rozdíl přístrojů v kosmetických salonech a přístrojích pro domácí použití?

Hlavním důvodem je rozdílná frekvence používání. Přístroje v kosmetických salonech musí být schopné pracovat nepřetržitě od rána do večera. Tím je kladena zvýšená náročnost na použité materiály a celkovou technologickou koncepci (větší zdroje napájení, větší míra chlazení, atd.) Výkon kosmetických přístrojů pro domácí použití je navržen tak, aby uživateli splnil avizované benefity. Vyšší frekvence použití = dražší výrobní náklady.

Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavice?

Po skončení ošetření mohou na aplikační hlavici ulpět mikroskopické částičky kůže. Očištěním zabráníte jednak jejich případnému vniknutí do přístroje a zajistíte především hygienu provozu.

Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?

Doporučená délka individuálního ošetření je v rozsahu od 10 do 15 minut.

Existují nějaké kontraindikace? (situace, kdy nelze přístroj používat)

Přístroj BeautyRelax je určen pro všechny typy pleti bez věkového omezení uživatele. Přístroj není vhodné používat, pokud trpí uživatel vážným kožním onemocněním. Viz. seznam kontraindikací v úvodu návodu.

Může přístroj používat více osob?

Ano. Je to možné, ale za dodržení určitých podmínek. Věnujte zvýšenou pozornost zejména dezinfekci aplikační hlavice. Zabráníte přenosu bakterií či případně kožních chorob. Pro dezinfekci použijte ideálně alkoholový roztok ve spreji. Povrch aplikační hlavice vždy důkladně osušte.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Nikoliv. Přístroj neslouží pro léčbu závažných kožních onemocnění. Přístroj NELEČÍ: aktinickou keratózu, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitidu lupénku.

Jak postupovat, když baterie ztratí po delší době kapacitu?

Pokud se postupem času kapacita baterie výrazně sníží, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz Zašleme informace, jakým způsobem lze výměnu baterie řešit.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu.

Může přístroj používat více osob?

Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce aplikační hlavice, druhá osoba přístroj použít může.

Jaké kosmetické přípravky kombinovat během ošetření přístrojem BeautyRelax?

Během samotného ošetření je doporučeno používat klasický čirý sonogel. Při použití kosmetických přípravků nebo sér jiného složení, může ošetření v kombinaci s radiofrekvence vyvolat na pleti alergickou reakci v případě, že je vaše pleť citlivější. Použití kosmetických přípravků je ideální po skončení ošetření, kdy je třeba pleť dostatečně hydratovat.

Jaké části těla lze přístrojem ošetřit?

Přístroj je určen pro ošetření oblasti obličeje, krku a popřípadě dekoltu.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte **výhradně nabíjecí adaptér**, který je součástí balení.
2. Jeden konec kabelu zapojte do vstupu pro napájení přístroje na spodní straně.
3. Přístroj můžete nabíjet také prostřednictvím stojánku.
4. Průběh a konec nabíjení signalizuje dioda **CHARGE**.
5. Jakmile je baterie nabita, blikání ustane.
6. Délka nabíjení závisí na stavu vybití a kondici baterie.
7. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu kontaktní plochy hlavice.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj Fraxlift Elegance

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2794**

EAN: **8594166119734**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Přístroj není zdravotnický prostředek. V případě používání více osobami je třeba dbát zvýšenou pozornost s hygienickými normami pro přístroje obdobného typu.

Produkt není zdravotnický prostředek.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 20.6.2022