

NÁVOD K OBSLUZE

Diamantová mikrodermabrazé
BeautyRelax **BR-2906**

BEAUTYRELAX PEELMAX ICAM HD



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
HLAVNÍ VÝHODY	5
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
OBSAH BALENÍ	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
SYSTÉM VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ	6
PROBLEMATIKA TVORBY ČERNÝCH TEČEK	7
PŮSOBNÍ VNĚJŠÍCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ	8
ÚČINKY PŮSOBNÍ ABRAZE PLETI	10
POPIS PŘÍSTROJE	11
NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	12
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	12
ROZLOŽENÍ VÝKONU VAKUOVÉHO SÁNÍ	12
POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ	12
VÝZNAM VYMĚNITELNÝCH APLIKÁTORŮ	13
VÝMĚNA APLIKÁTORU	14
PÁROVÁNÍ PŘES WIFI PŘENOS	16
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	25
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	26
DOSAŽITELNÉ ÚČINKY ČIŠTĚNÍ PLETI	27
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	28
NABÍJENÍ BATERIE	29
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	29
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	30
CERTIFIKACE	30
DOVOZCE	30
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	31

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



HLAVNÍ VÝHODY

- Neinvazivní ošetření (přístroj neproniká přímo skrz pokožku)
- Ošetření bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Bez nežádoucích trvalých změn pigmentace pleti
- Ihned po proceduře lze použít kosmetické přípravky

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

- Vytahuje černé tečky a nečistoty z kožních pórů
- Napomáhá zbavit pleti mastnoty
- Stimuluje kolagenní a elastická vlákna
- Zlepšuje prokrvení pleti
- Pleť je svěží, hladší a přirozeně zářivější
- Zvětšení obrazu pleti poskytuje cenné informace pro důkladnou diagnostiku jejího stavu

TECHNICKÉ PARAMETRY

- 3 úrovně výkonu vakuového nasávání
- 4 vyměnitelné aplikátory s různými tvary koncovky
- HD kamera s násobným optickým zoomem
- Přenos obrazu do telefonu nebo tabletu pomocí WiFi
- Požadavky na aplikaci pro zobrazení zvětšeného obrazu: Android 4.4, IOS 9.0, Windows vista/7/8/10, Mac OS X10.8 a vyšší
- Napájení: USB kabelem (součástí balení)
- Kapacita baterie: 800mAh
- Rozměry: 22x15x7cm
- Hmotnost: 490g

OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2906
- 4 vyměnitelné aplikátory
- Napájecí USB kabel + adaptér 220V
- Návod k obsluze



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE


Diamantová mikrodermabrazie BeautyRelax Peelmax iCam HD je inovativní nástroj pro rutinní péči o pokožku. Čištění pleti je povýšeno na skutečně profesionální úroveň. Nejsilnější stránka přístroje spočívá v nekompromisním výkonu vakuového sání v kombinaci s pokročilou technologií kamery s HD rozlišením. Vysoké rozlišení a násobné zvětšení poskytne reálný stav vaší pleti se zobrazením na vašem mobilním telefonu nebo tabletu. Díky vyměnitelným aplikátorům představuje univerzální použití. Pleť bude čistá a dokonale hladká!

SYSTÉM VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ




Naše pleť je každý den vystavena celé řadě faktorů, které mají negativní vliv (prach, smog, bakterie, zbylé částičky make-upu, vlhkost). Tvorba mazu v kombinaci s nečistotami a odumřelými kožními buňkami ucpe kožní pór a projeví se vznikem **černých teček** nebo **pupínků s bílými "čepičkami"**. Ideální prostředí pro vznik bakterií a následného zánětu. Hlavním předpokladem pro krásnou a zdravou pleť je pravidelná péče.

Kosmetický přístroj BeautyRelax pleť důkladně vyčistí. V případě vzniku černých teček a pupínků napomáhá k jejich odstranění. Aplikační hlavice nasaje pokožku a hrana aplikátoru odstraní z povrchu nečistoty, **černé tečky a nevzhledné bílé čepičky**. Nepříjemnému ručnímu vymačkávání, které způsobí výrazně zarudnutí a podráždění pleti je definitivní konec! Povrchové pigmentové skvrnky a póry se zjemňují. Kosmetický přístroj BeautyRelax je vysoce účinný, ale zároveň šetrný k pleti!

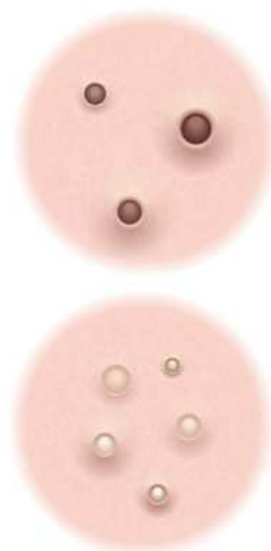


PROBLEMATIKA TVORBY ČERNÝCH TEČEK

Jednou z hlavních příčin vzniku černých teček je ucpání kožních pórů mazem nebo odumřelou pokožkou. Černá barva hlavičky ucpaného póru není nečistota. Jde o výsledek oxidace po vystavení mazu a odumřelých kožních buněk okolnímu prostředí. Kosmetický přístroj s vakuovým sáním patří mezi nejúčinnější metodu odstranění černých teček při co nejmenším podráždění pleti.

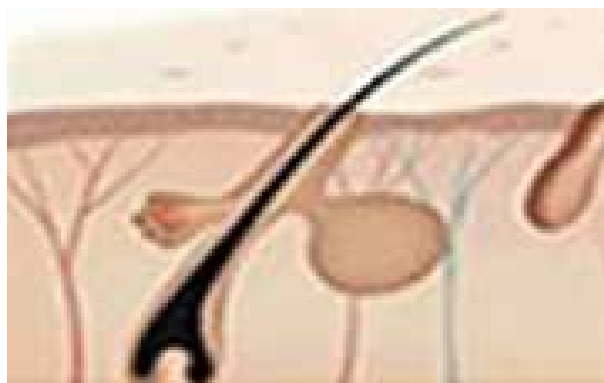


Mastnota z mazových žláz je uvolněna podél vlasových folikulů.

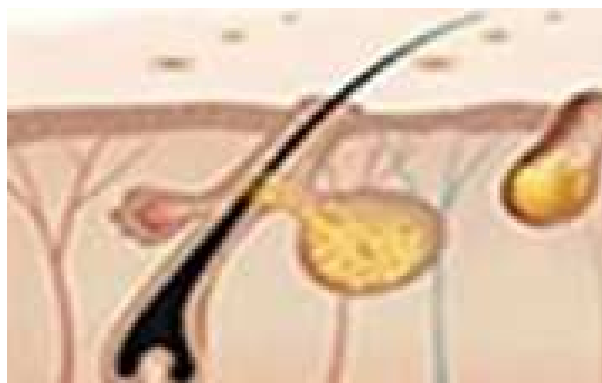

Mazové žlázy uvolňují větší či menší množství mastnoty dle různých faktorů.



Mastnota zbělá.

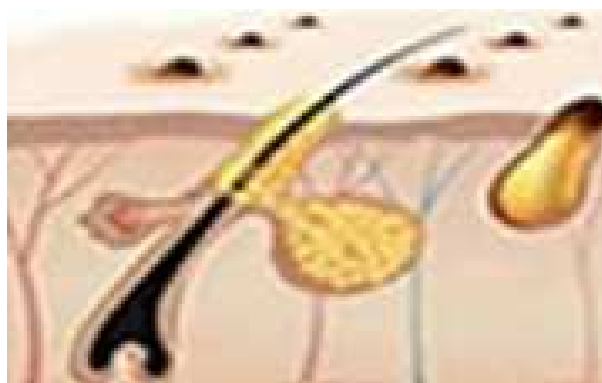

Mastnota je exponována a oxiduje ve vzduchu při vzniku velkého množství černých teček.

PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ

Naše pleť je vystavena celou řadu vnějších faktorů, které různou měrou ovlivňují kvalitu a rychlost stárnutí naší pleti. Slunce, prach, málo spánku, nesprávná životospráva, nedostatečné pravidelné vyčištění pleti od makeupu.



Zvětšené póry, zvýšený výskyt černých teček, neefektivní péče o pleť



Zvýšený výskyt bakterií, zvýšená citlivost pleti, větší náchylnost k tvorbě akné



Zvýšená produkce mazu, mastná pleť, která se velmi špatně čistí



Ucpané póry nečistotami ze zbytků make-upu se sníženým účinkem čištění pleti

Trápí vás některý z těchto problémů?

- Póry kůže jsou hrubější než obvykle.
- Pleť není barevně sjednocená.
- Dochází k výskytu pigmentových skvrnek.
- Pleť není dostatečně pružná.
- Pleť působí unaveným dojmem.

Pokud je odpověď alespoň v jednom případě ano diamantová mikrodermabrazie nabízí řešení!


Stres, nesprávný spánkový režim, nevyvážená strava, držení neustálých diet, působení nečistot v ovzduší. Jedny z mnoha faktorů, které mají nezanedbatelný vliv na tvorbu akné, vrásek, výskyt pigmentových skvrn a celkovou ztrátu pružnosti pleti. Zdroj celé řady kožních problémů lze nalézt v nedostatečné péči o pleť v období dospívání a období kolem dvacátého roku života. Nic však není ztraceno! Diamantová mikrodermabrazie je účinným nástrojem, který působení negativních vlivů na pleť výrazně eliminuje. Hýčkejte svoji pleť jako v profesionální estetické klinice!

**Zpětná vazba uživatelů na dotaz, jaký měli pocit při krátkodobém používání diamantové mikrodermabrazie:**

- 93% žen pociťují hladší pokožku
- 93% žen pociťuje zpevnění kůže
- 89% žen pociťuje zvýšení elasticity kůže
- 91% žen pociťuje celkově mladistvější vzhled kůže

Skoncovat s make-upem není sen!

Nová přístrojová metoda diamantové mikrodermabrazie pracuje na principu velmi jemného mechanického peelingu aplikačními koncovkami pokrytými diamantovou drtí různé hrubosti, které obrušují vrchní vrstvičku kůže, čistí a oživují ji. Zlepšuje se prokrvení kůže, dochází ke stimulaci kolagenních a elastických vláken. Výsledkem je hladší, svěží pleť, lepší tonus (pleť je barevně jednotnější), povrchové pigmentové skvrnky a póry se výrazně zjemňují.

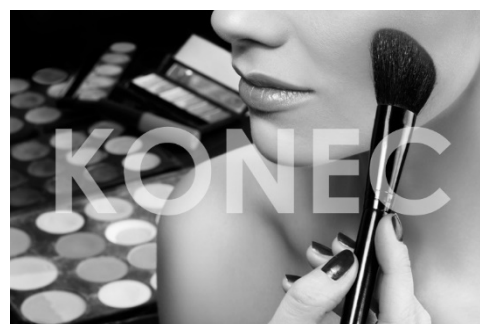

ÚČINKY PŮSOBNÍ ABRAZE PLETI

Uvolnění kožních pórů




Potlačení aknézní pleti



Podpora krevního oběhu




Odstranění odumřelých buněk a nečistot

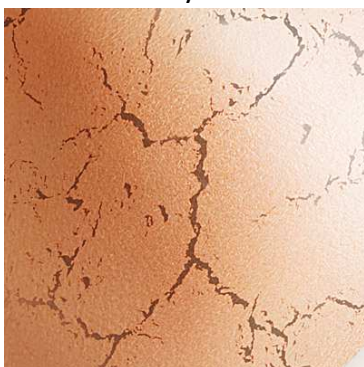

Vyrovnění barevného tonusu pleti



Zvýšení elasticity pleti

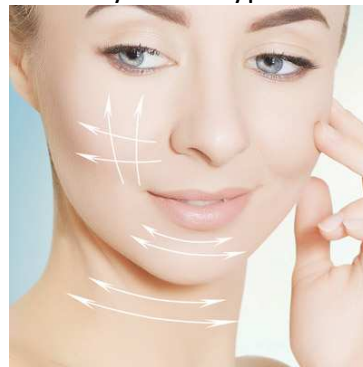

Mechanická masáž pokožky



Prevence proti tvorbě černých teček



Hlubkový peeling pleti



POPIS PŘÍSTROJE



- 1. Vyměnitelný aplikátor
- 2. Světelná indikace
- 3. Tlačítko ON/OFF
- 4. Vstup pro napájecí kabel

NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Než přistoupíte k samotnému ošetření pleti přístrojem, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Vyčkejte, až pleť zcela uschne. Na pleti se před použitím nesmí vyskytovat stopy vlhkosti. Před prvním použitím přístroje si vyzkoušejte jeho aplikaci např. na předloktí. Vyčkejte přibližně 1 hodinu, zda při použití vakuového sání nebude pokožka negativně reagovat (platí v případě použití aplikační hlavice s abrazivním povrchem).

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Přístroj nepoužívejte na silně zjizvenou pokožku.
- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte ekzémy nebo jiným kožním onemocněním.
- Pokud máte citlivou pleť, používejte přístroj se zvýšenou opatrností.
- Netlačte aplikační hlavici příliš velkou silou na pleť.
- Po ošetření může být pokožka mírně začervenalá. Jedná se o dočasný efekt, který by měl zmizet během několika desítek minut.
- Po ošetření je doporučeno používat vyživující masku, krém nebo noční krém. Ujistěte se, že používáte krém proti slunci, než vyjdete ven (v případě silného slunečního svitu).
- Po ošetření obličeje můžete po zklidnění pleti téměř ihned aplikovat make-up podle potřeby.

ROZLOŽENÍ VÝKONU VAKUOVÉHO SÁNÍ

Sílu vakuového sání si můžete nastavit individuálně podle vaší potřeby. V případě, že máte velmi citlivou pleť a znečištění není výrazné, použijte nižší výkon. Pokud je vaše pleť odolná a silně znečištěná, využijte vyššího výkonu. Pravidelným používáním si nastavení výkonu velmi rychle osvojíte. Vždy se snažte zvolit vhodný kompromis výkonu, aby bylo ošetření účinné, ale zároveň pro vás komfortní. Počítejte s tím, že při vyšším výkonu bude pleť více podrážděná a zarudlá. Bude tak potřebovat delší čas na rekonvalescenci.

POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ

Každý máme jinou velikost obličeje, tvar a jinak citlivou pleť. Rozdíly jsou také v aktuální kondici pleti. Každý z nás je originál. Součástí balení jsou 4 různé aplikátory, aby bylo použití kosmetického přístroje co nejvíce univerzální. Instrukce k jednotlivým aplikátorům jsou pouze obecné. V praxi si můžete sami vyzkoušet, která kombinace aplikátorů je pro vás nejvhodnější. Může se stát, že z dlouhodobého časového horizontu některé vůbec nevyužijete.

Aplikátor s abrazivním povrchem používejte na intenzivní mechanické očištění pleti. Zbaví pleť důkladně všech nečistot. Ostatní aplikátory jsou zakončeny otvorem různého průměru. Čím je otvor menší, tím prochází podtlak menším prostorem. V praxi to znamená, že menší otvor koncentruje na menší ploše větší tah podtlaku. Výkon vakuového sání si tak můžete upravit nejen pomocí tlačítka na přístroji, ale také vhodnou volbou aplikátoru. Aplikátory s různým průměrem otvoru používejte na vytahování černých teček, podporu lokálního krevního oběhu obličeje nebo masážní lifting jemných mimických vrásek.

VÝZNAM VYMĚNITELNÝCH APLIKÁTORŮ



Aplikátor s abrazivním povrchem

Aplikační hlavice s abrazivním povrchem obrušuje vrchní vrstvičku pleti, čistí a oživuje ji. Výsledkem je hladší a svěží pleť již po prvním použití. Kožní póry jsou výrazně jemnější.



Aplikátor s malým průměrem kruhové koncovky

Určeno pro velmi malé oblasti ošetření s větším počtem záhybů. Ideální pro hloubkové čištění citlivé pleti nebo částí obličeje s výskytem černých teček.



Aplikátor se středním průměrem kruhové koncovky

Optimální pro rty, nos a zejména záhyby nosu. Lze použít na čištění pleti. Skvělé pro eliminaci jemných mimických vrásek.





Aplikátor s velkým průměrem kruhové koncovky

Vhodné pro čelo nebo nos. Ideální pro použití na vytažení černých teček. Můžete použít na ošetření obličeje nebo dekoltu.


VÝMĚNA APLIKÁTORU

Aplikátory můžete měnit dle vašeho výběru. Výměna je velice snadná. Aplikátor je ve spojení s přístrojem pomocí dvou kolíčků **(1)**. Kolíčky na hlavici přístroje musí zapadnout do drážek z vnější strany aplikátoru **(2)**.

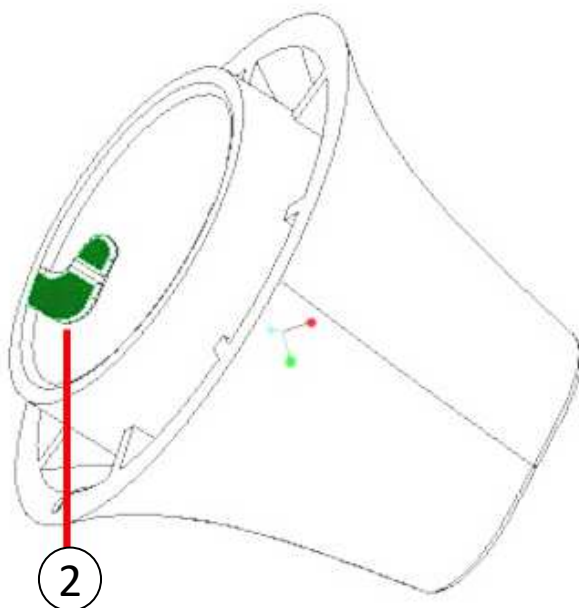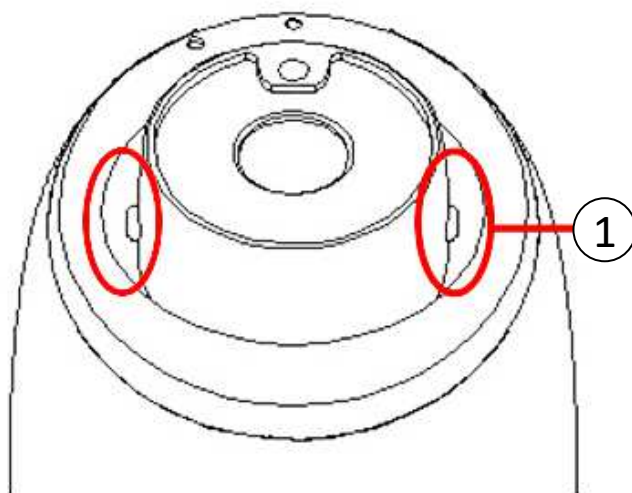

VÝMĚNA APLIKÁTORU

Pro odstranění aplikátoru pootočte hlavici proti směru pohybu hodinových ručiček. Aplikátor uzamkněte pootočením ve směru pohybu hodinových ručiček.

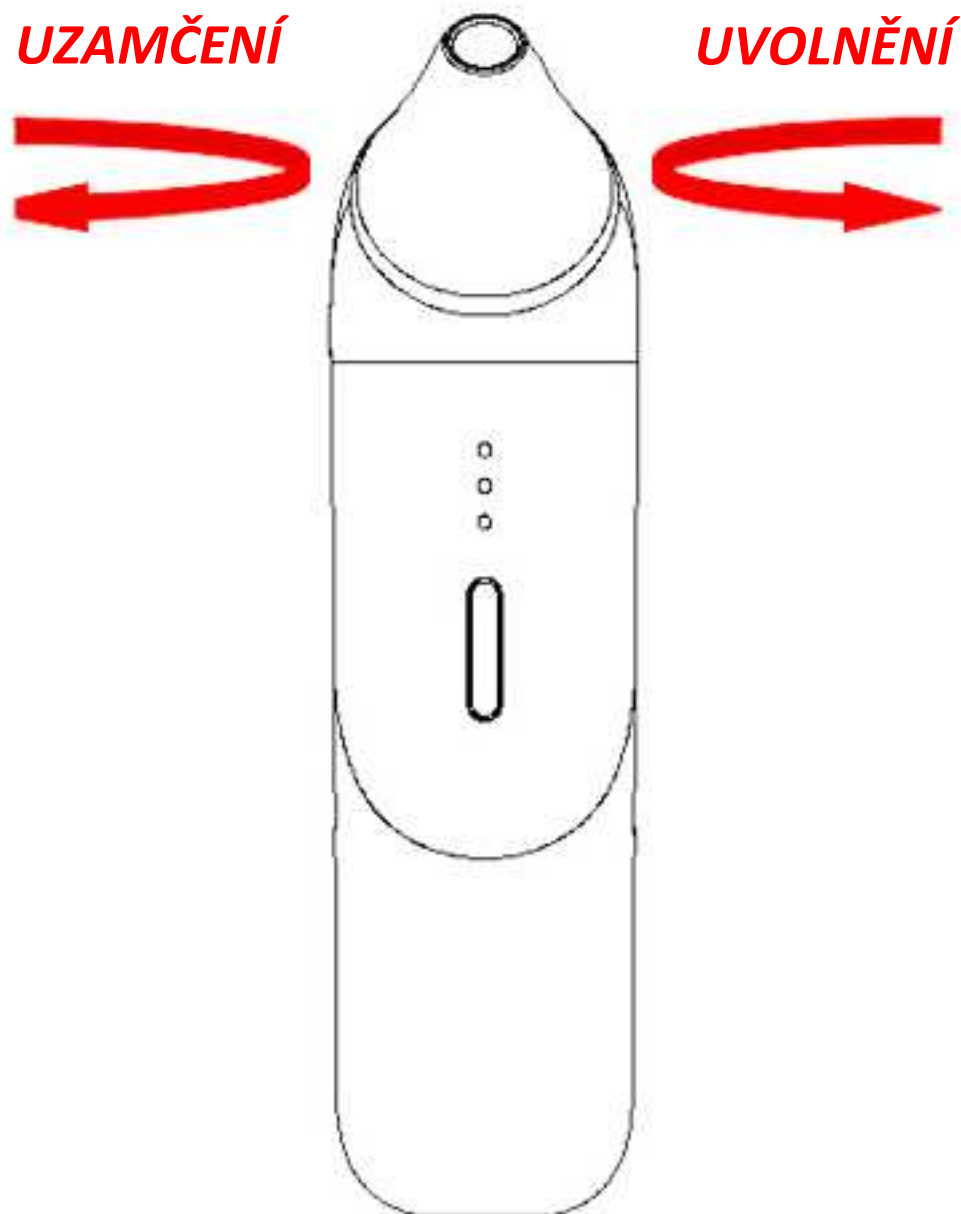


PÁROVÁNÍ PŘES WIFI PŘENOS


1. Na vašem chytrém telefonu nebo tabletu si nainstalujte aplikaci **VIWIFI**.
2. Aplikaci **VIWIFI** naleznete pro operační systém **ANDROID** v **GooglePlay** nebo pro operační systém **IOS** v **AppStore**. Do pole vyhledávání aplikace zadejte název „**VIWIFI**“.
3. Pokud se vám aplikace nepodaří v **GooglePlay** nalézt, aplikaci můžete stáhnout zadáním přímého odkazu: <http://indmu.com/hot/viwife/viwifi.apk> nebo naskenováním QR kódu:




- 4.** Zvolte možnost „**POVOLIT**“. Nemusíte mít obavu. Aplikace VIWIFI je pro použití bezpečná.

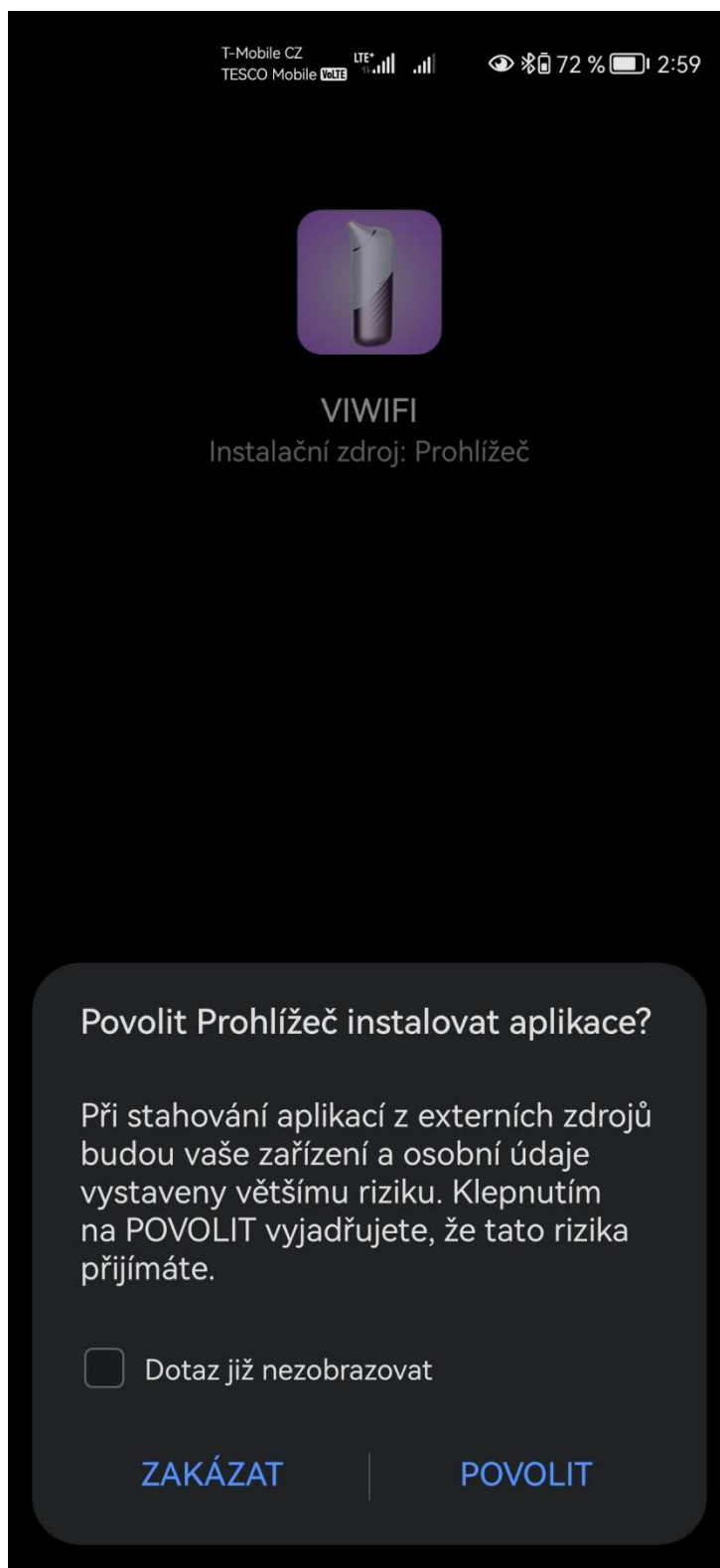


5. Zvolte možnost „**INSTALOVAT**“.

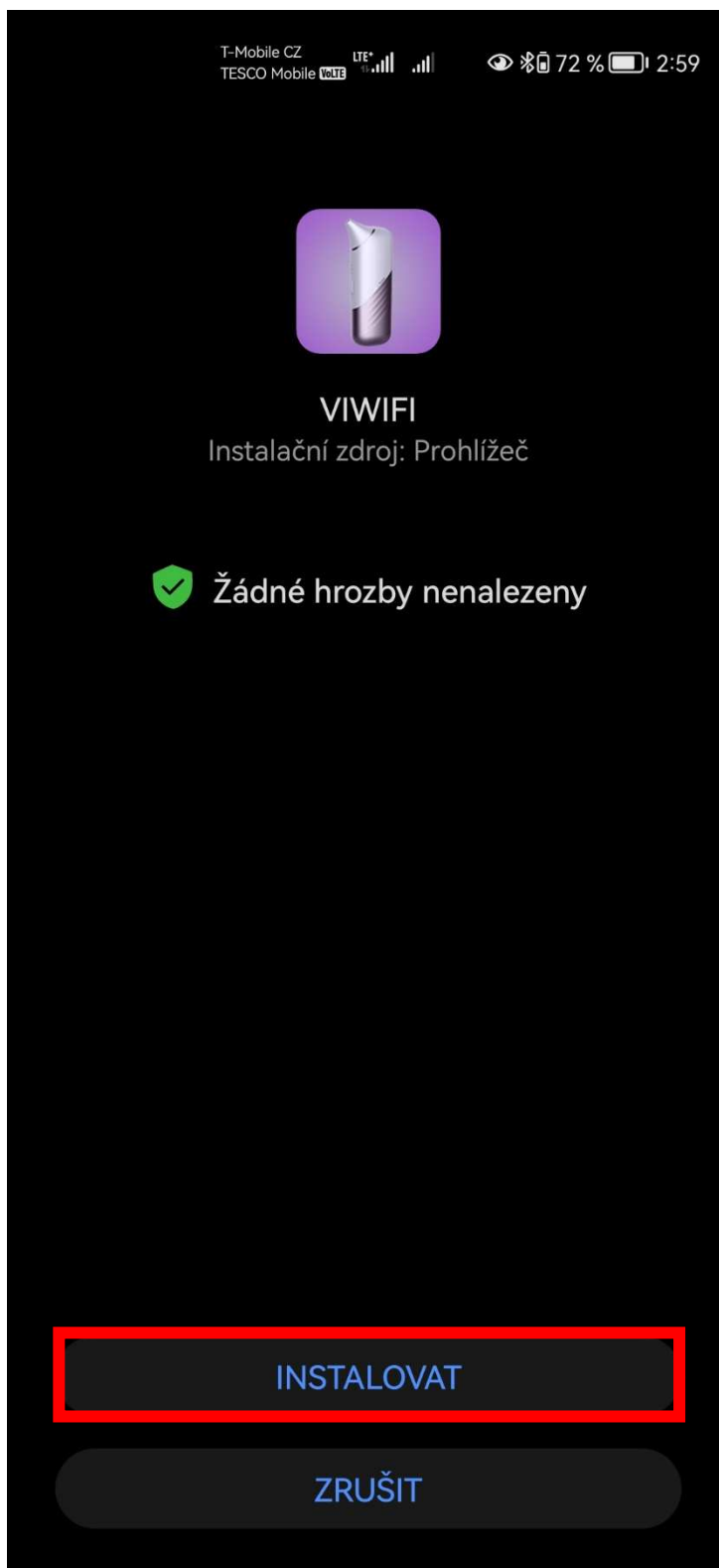

- 6.** V případě operačního systému **IOS** naleznete aplikaci v **APPSTORE**. Aplikace VIWIFI pro APPLE telefony a tablety může být zpoplatněna. Do pole hledání zadejte **VIWIFI**.

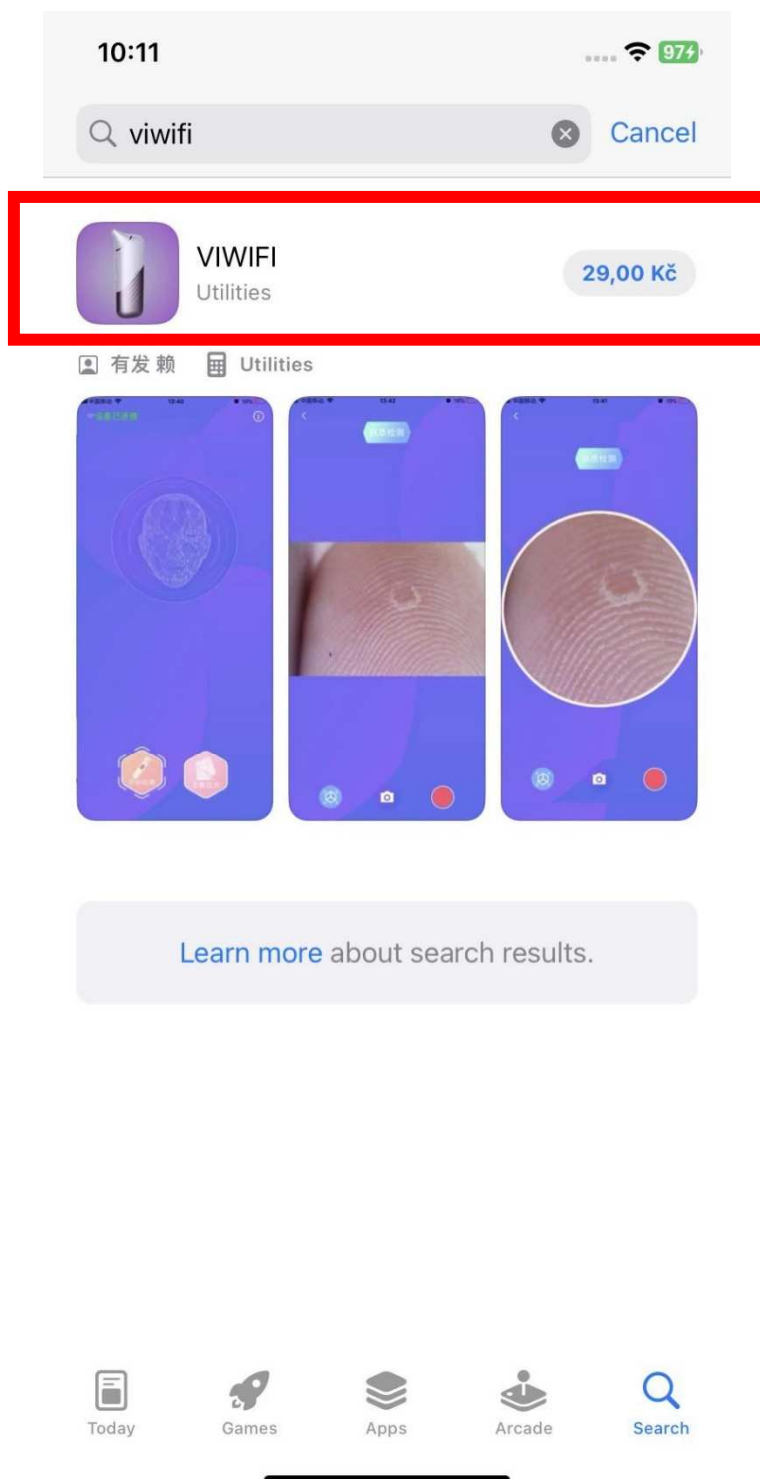


7. Jakmile je instalace aplikace dokončena, je třeba spárovat váš chytrý telefon nebo tablet přes Wifi konektivitu.
8. Stiskněte na kosmetickém přístroji dlouze tlačítko **ON/OFF**. Modrá světelná signalizace se rozsvítí. Nyní je kosmetický přístroj připraven na spárování.
9. Nyní je třeba nastavit Wifi připojení ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu. Otevřete Wifi nastavení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

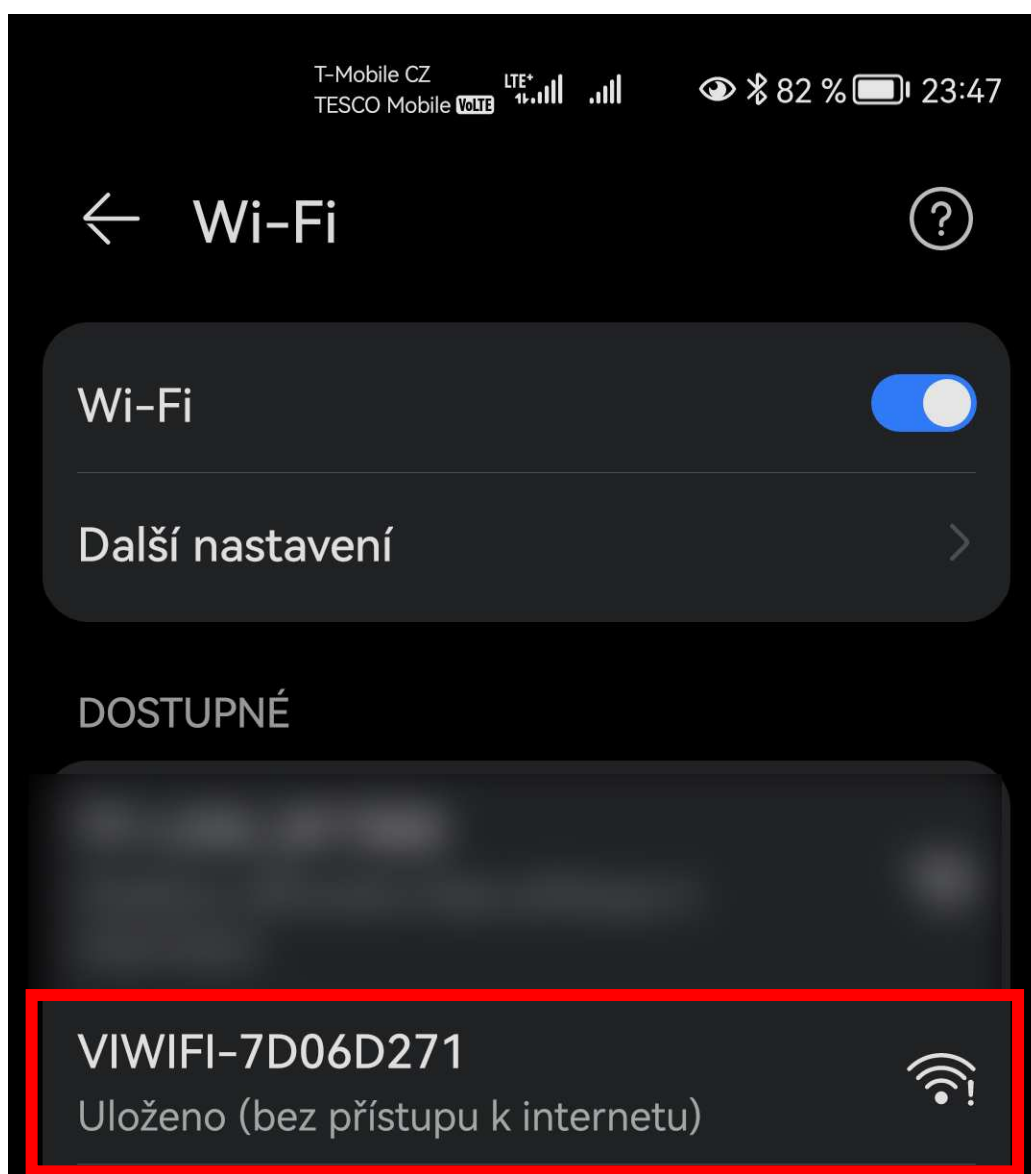


- 10.** Ve Wifi nastavení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu se vám kosmetický přístroj zobrazí jako „**VIWIFI-XXXXXXX**“.
- 11.** Párování by mělo proběhnout bez nutnosti zadání hesla. Zvolte „**VIWIFI-XXXXXXX**“ a následně **PŘIPOJIT**.




12. Úspěšné spárování je potvrzeno notifikací **PŘIPOJENO**.

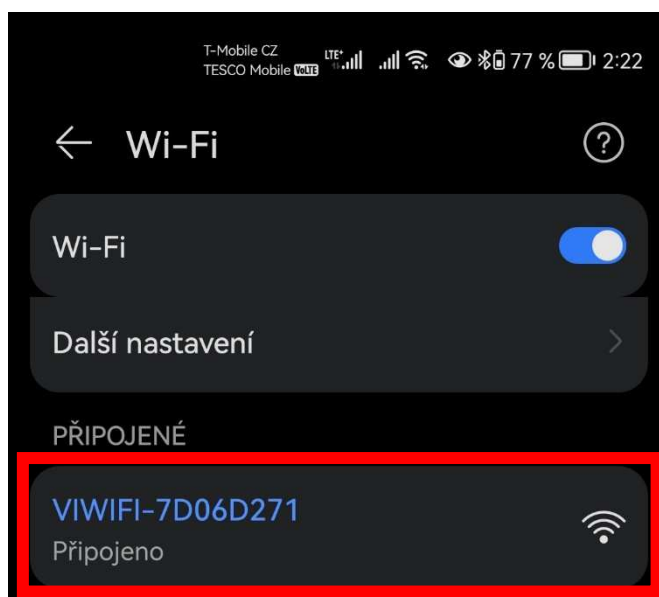


13. Otevřete aplikaci **VIWIFI**. Aplikace může vyžadovat povolení k přístupu vašeho fotoaparátu.

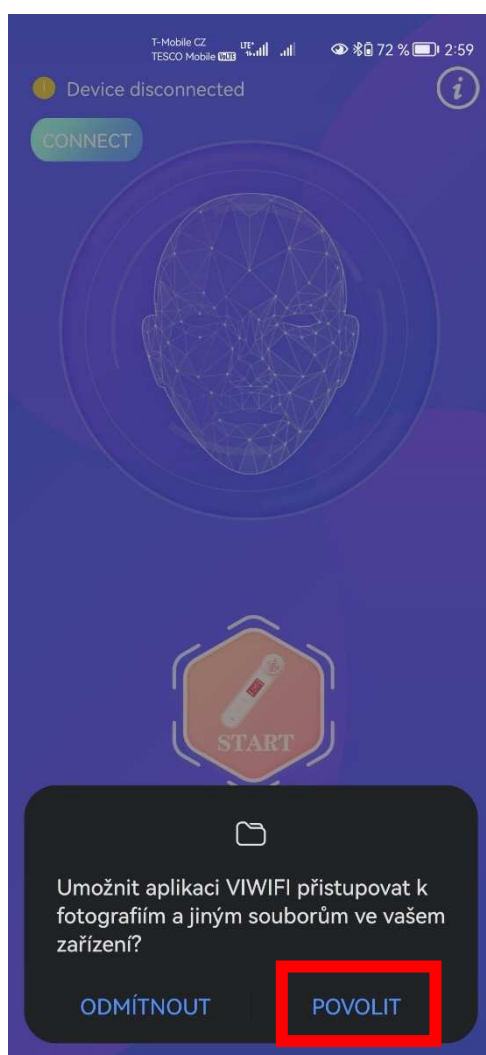

- 14.** Stiskněte tlačítko **START**. Na displeji chytrého telefonu nebo tabletu se vám zobrazí obraz z kamery kosmetického přístroje. **Upozornění:** kamera kosmetického přístroje je přesně zaostřena na vzdálenost při nasazené aplikační hlavici. Pokud Aplikační hlavici nenasadíte a přístroj přitisknete k pleti, obraz bude rozostřen.

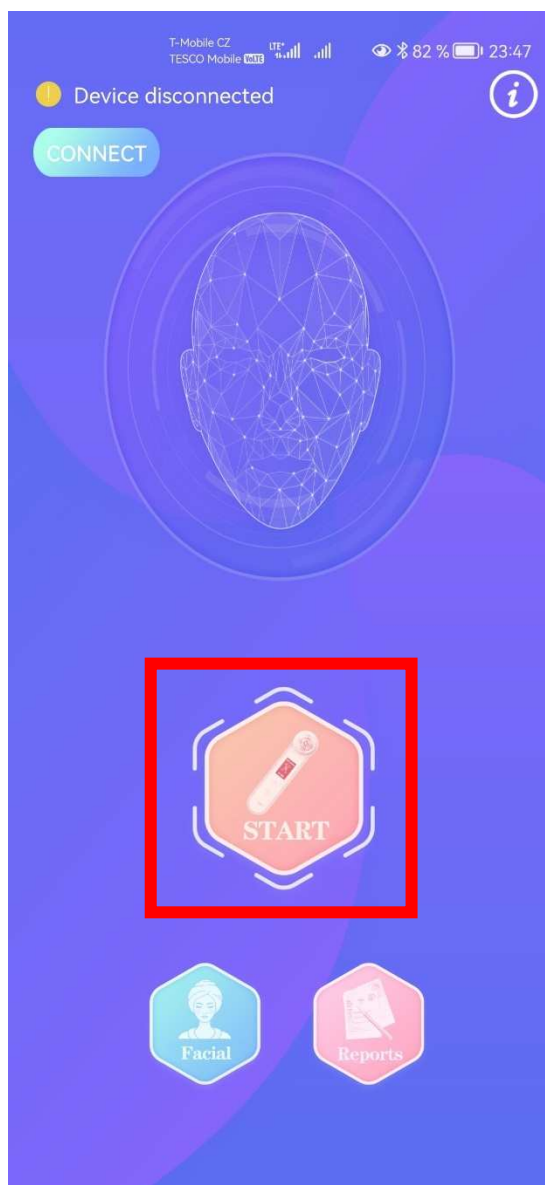

- 15.** Přitiskněte aplikační hlavici k pleti. Na displeji chytrého telefonu nebo tabletu se vám zobrazí obraz z kamery kosmetického přístroje.
- 16.** V průběhu ošetření můžete kdykoliv vytvořit obrázek nebo video, které se uloží do vašeho telefonu. Pro ukládání obrázku a videa zvolte tlačítka s příslušnou ikonou.

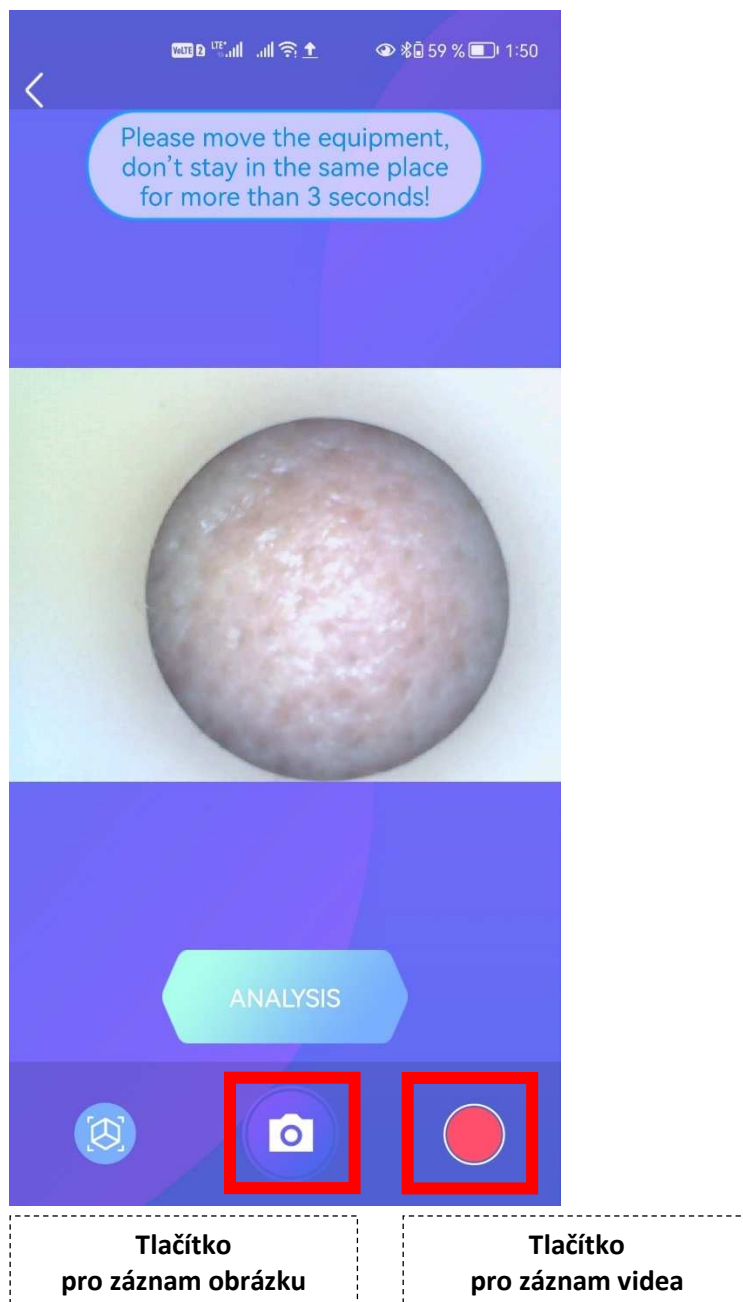

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
2. Jakmile na přístroji svítí modrá světelná signalizace, je třeba ve Wifi nastavení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu potvrdit uživatele „**VIWIFI-XXXXXXX**“.
3. Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete vakuové nasávání – nízká úroveň 1.
4. Dalším krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** zvýšíte vakuové nasávání – střední úroveň 2.
5. Dalším krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** zvýšíte vakuové nasávání – vysoká úroveň 3.
6. Aplikační hlavici pohybujte ve směrech - viz. sekce "**METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU**". Aplikátorem se pohybujte po pleti pomalu se zvýšenou pečlivostí. Nikdy nezůstávejte na jednom místě déle než dvě sekundy. Druhou rukou si můžete napomáhat tím, že budete pokožku jemně napínat. Pohyb hlavice bude po povrchu pokožky co nejhladší.
7. Pro uložení obrázku nebo záznam videa můžete použít tlačítko na přístroji: **Tlačítko fotoaparát/kamera**. Krátkým stiskem vytvoříte záznam obrázku. Dlouhým stiskem spustíte záznam videa. Dalším dlouhým stiskem záznam dokončíte.
8. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

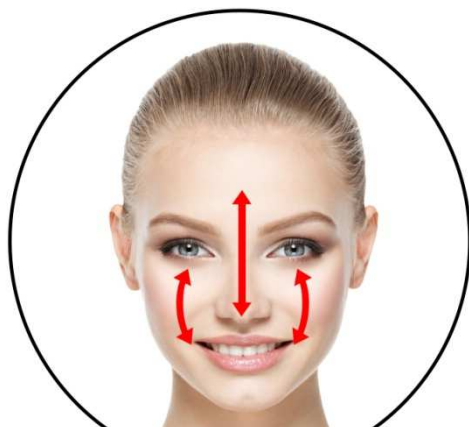


T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

DOSAŽITELNÉ ÚČINKY ČIŠTĚNÍ PLETI

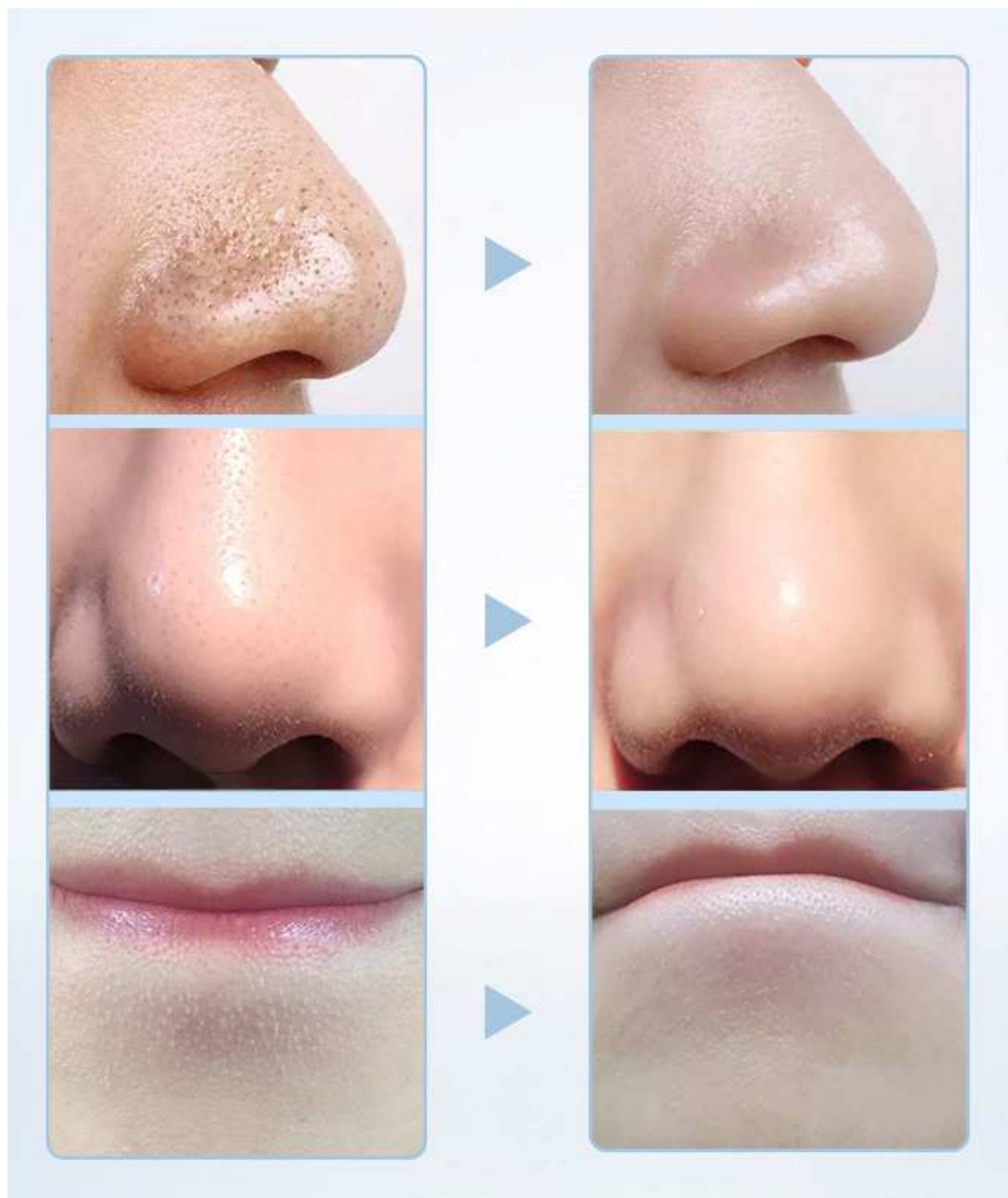

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jaká je optimální délka individuálního ošetření pleti?

Pro čištění pleti by se optimální délka měla pohybovat v rozsahu od 15 do 30 minut. Záleží, jak pečlivě se budete věnovat všem částem obličeje, popřípadě podbradku či dekoltu. Začínáte s kratší dobou ošetření a postupně prodlužujete podle toho, jak bude vaše pleť na přístroj reagovat. Ne vždy platí čím déle tím lépe. Pokud máte citlivější pleť, začínáte s kratší délkou ošetření. Při dalším použití přístroje můžete délku ošetření postupně prodlužovat.

Představuje ošetření pleti následné omezení?

Po dokončení čištění pleti může pokožka mírně zarudnout. Jedná se o naprosto přirozený efekt. Podpoří se krevní oběh a lymfatický systém obličeje. Zbarvení by mělo opadnout v řádech desítek minut. Pokožka se dostane zpět do normálu.

Je používání přístroje bolestivé?

Přestože je čištění založeno na principu odsávání svrchní vrstvičky odumřelé pokožky, nebudete cítit žádné nepříjemné pocity. Díky vakuovému sání budete čištění pleti vnímat jako příjemnou uvolňující masáž. Pokud máte velmi citlivou pleť, nastavte si menší výkon vakuového nasávání. Výkon si upravujte pocitově podle toho, jak bude vaše pleť reagovat.

Proč někdy bývá tento způsob ošetření pleti nazýván jako rejuvénace?

Rejuvénace nastartuje růst nových, zdravých a elastických kožních buněk, odolných vůči vnějším vlivům. Vrátil tak biologický čas pokožky zpět a zpomalí její další stárnutí.

Je přístroj vhodný i pro moji pleť?

Čištění je vhodné pro všechny typy pleti. Omezení se vztahuje pouze na případy, kdy je pleť zasažena výrazným kožním onemocněním. Zvýšenou pozornost při používání musí dbát osoby, které mají na dotyk vysoce citlivou tenkou pleť. Důležitou úlohu hraje také reliéf pleti. Pokud se na vaší pleti vyskytuje větší počet jizviček nebo nestandardních nerovností (bradavice, kožní výrůstky), ošetření to může komplikovat. Je doporučeno se těmto místům aplikátorem vyhnout.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí kabel, který je součástí balení. Pokud modrá světelná signalizace bliká, stav baterie je nízký.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí kabel s adaptérem, které jsou součástí balení.
2. Vysuňte gumovou krytku zdířky napájení (pomoci si můžete např. nehtem).
3. Jeden konec kabelu zapojte do vstupu pro napájení přístroje. Druhý konec připojte do USB portu počítače, notebooku nebo 220V síťového adaptéru.
4. Průběh nabíjení doprovází blikání světelné signalizace.
5. Jakmile blikání ustane, baterie je plně nabita. Kabel odpojte od přístroje.
6. V průběhu nabíjení baterie přístroj nepoužívejte.
7. Délka nabíjení závisí na stavu vybití a kondici baterie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním aplikátoru jej odpojte od přístroje. Samotný aplikátor můžete omýt pomocí proudu vlažné vody. Pro čištění úzkých prostor aplikátoru je ideální použít vatovou tyčinku pro čištění uší. K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátorů nebo přístroje žádné ostré předměty, které by je mohly poškodit.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Diamantová mikrodermabraze BEAUTYRELAX PEELMAX ICAM HD

uvedený na trh pod modelovým označením **BeautyRelax BR-2906**

EAN 8594166121782

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN55014-1:2017 EN55014-2:2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.1.2023

A blue ink signature is written over a company stamp. The stamp includes the company name 'SANTADRIA s.r.o.', the address 'Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno', and the identification number 'DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160'.

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel