

NÁVOD K OBSLUZE

BeautyRelax BR-2912

BODYFACE SILHOUETTE



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
SLOVO ÚVODEM	5
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	6
UPOZORNĚNÍ	8
KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT	9
ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	10
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	10
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - RADIOFREKVENCE	10
POVOLENÉ PARTIE APLIKAE – ČERVENÉ SVĚTLO 650NM	11
DOPORUČENÍ	11
POUŽITÍ SONOGELU	11
LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK	12
HLAVNÍ VÝHODY	15
VLASTNOSTI PŘÍSTROJE	15
TECHNICKÉ PARAMETRY	16
OBSAH BALENÍ	16
URČENO PRO VŠECHNY TYPY POSTAV	17
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	18
METODY REDUKCE VRÁSEK	18
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	19
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	20
RADIOFREKVENCE	21
RADIOFREKVENCE VE TŘECH PROVEDENÍCH	22
VAKUOVÉ NASÁVÁNÍ S RADIOFREKVENCÍ	23
ČERVENÉ SVĚTLO	24
POPIS PŘÍSTROJE	25
POPIS DISPLEJE - HLAVNÍ NABÍDKA	29
POPIS DISPLEJE - ULTRAZVUKOVÉ VLNY	30
NASTAVENÍ INTENZITY ULTRAZVUKU	31
POPIS DISPLEJE - VAKUOVÉ SÁNÍ	32
POPIS DISPLEJE - RADIOFREKVENCE 3 KOLÍČKY	33
POPIS DISPLEJE - RADIOFREKVENCE 6 KOLÍČKY	34
POPIS DISPLEJE - RADIOFREKVENCE 4 KOLÍČKY	35
POPIS DISPLEJE - ČERVENÉ SVĚTLO	36
INSTALACE PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE	37
INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁKY HLAVIC	38

OBSAH:

PŘÍPADNÁ VÝMĚNA POJISTKY	39
INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ FILTR	39
VÝSLEDNÁ PODOBA PŘÍSTROJE PO INSTALACI	40
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ULTRAZVUK	41
ČAS APLIKACE - ULTRAZVUK	42
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	43
UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - ULTRAZVUK	44
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - VAKUOVÉ SÁNÍ	48
UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - VAKUOVÉ SÁNÍ	50
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - VAKUOVÉ SÁNÍ	52
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - RADIOFREKVENCE 3 KOLÍČKY	53
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - RADIOFREKVENCE 6 KOLÍČKŮ	54
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - RADIOFREKVENCE 4 KOLÍČKY	55
ČAS APLIKACE - RADIOFREKVENCE	56
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	57
METODA APLIKACE OBLIČEJE KRKU DEKOLTU	59
MAPA CITLIVOSTI PLETI	62
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ČERVENÉ SVĚTLO	63
PŘÍKLADY POUŽITÍ SVĚTELNÝCH APLIKÁTORŮ	64
DÉLKA A FREKVENCE POUŽITÍ HLAVIC	68
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ČERVENÉHO SVĚTLA	69
DOPORUČENÁ METODA POUŽITÍ HLAVIC	70
BEAUTYRELAX VIDEA NA YOUTUBE	73
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	74
ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU	77
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	78
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	79
CERTIFIKACE	79
EU DISTRIBUTOR	79
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	80

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – estetické přístroje pro domácí péči i profesionální provozy

BeautyRelax je česká značka zaměřená na vývoj a distribuci estetických přístrojů určených pro široké spektrum uživatelů. Od roku 2010 přinášíme řešení, která nacházejí uplatnění jak v domácí péči, tak v kosmetických salonech, wellness centrech a dalších profesionálních provozech. Díky širokému sortimentu si u nás může vybrat každý – od běžných uživatelů hledajících komfortní péči v domácím prostředí až po profesionály, kteří potřebují spolehlivé přístroje pro každodenní práci.

Jeden sortiment, mnoho možností využití

Přístroje BeautyRelax jsou navrženy s ohledem na různé úrovně zkušeností i rozdílné nároky na provoz. Nabídka zahrnuje jednodušší modely vhodné pro domácí použití i technicky pokročilejší zařízení určená pro profesionální prostředí.

Použité technologie vycházejí z běžně využívaných postupů v oblasti estetické péče, například:

- Radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud

Každý produkt je určen k používání v souladu s návodem výrobce a platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Pro domácí uživatele

Pro jednotlivce, kteří preferují péči v pohodlí domova, nabízí BeautyRelax přístroje:

- s jednoduchým ovládáním
- určené pro pravidelné osobní použití
- umožňující přizpůsobit péči individuálním potřebám

Domácí přístroje jsou navrženy tak, aby se mohly stát součástí běžné rutiny péče o pleť, tělo nebo vlasy.

Pro salony a profesionální provozy

Pro kosmetická studia, salony a wellness zařízení je v nabídce řada přístrojů:

- vhodných pro častější provoz
- s širšími možnostmi nastavení
- určených pro profesionální použití

Profesionální uživatelé mohou vybírat zařízení podle zaměření provozu, typu poskytovaných služeb a individuálních preferencí.

Přehled kategorií přístrojů

- **Kosmetické přístroje** – určené k péči o vzhled a komfort pleti
- **Přístroje pro péči o tělo** – zaměřené na estetickou péči o postavu
- **Masážní přístroje** – vhodné pro relaxaci a regeneraci
- **IPL přístroje** – určené k dlouhodobému omezení růstu chloupků při pravidelném používání

Výběr konkrétního přístroje vždy závisí na individuálních potřebách, zkušenostech uživatele a způsobu použití.

Každý si vybere to své

Ať už hledáte přístroj pro osobní péči doma, nebo zařízení pro profesionální salon, BeautyRelax nabízí široké spektrum možností. Díky rozmanité nabídce modelů, rozdílným technickým parametrům a různým úrovním obsluhy si u nás najde řešení každý uživatel. Rádi vám pomůžeme s výběrem přístroje, který bude odpovídat vašim požadavkům i plánovanému využití.

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení produktu BeautyRelax. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům a upozorněním. Přístroj používejte výhradně v souladu s uvedenými instrukcemi a doporučeními výrobce.

Dodržování pokynů v tomto návodu přispívá k bezpečnému používání přístroje a jeho správné funkci. Tento návod slouží k seznámení s funkcemi přístroje a doporučeným způsobem jeho používání.

Obecná upozornění

Instrukce uvedené v tomto návodu berete prosím s náležitou vážností. Přístroj je určen pro estetickou a masážní péči a pracuje s technologiemi využívanými v oblasti neinvazivní estetické aplikace. Přístroj není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci jakýchkoli onemocnění.

Přístroj pracuje s regulovatelným výkonem. Intenzitu vždy nastavujte s ohledem na vlastní komfort a doporučení uvedená v návodu. Nepřekračujte doporučené hodnoty ani četnost použití.

Důležité informace o přístroji a jeho použití

- Estetický přístroj BeautyRelax je zařazen do kategorie masážních a estetických přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek** ve smyslu platné legislativy. Přístroj není určen k léčbě obezity, kožních onemocnění ani jiných zdravotních stavů.
- Přístroj je určen k **neinvazivnímu použití**, což znamená, že během aplikace nedochází k porušení integrity pokožky ani k pronikání aplikačních částí pod kůži.
- Přístroj splňuje požadavky platných technických a bezpečnostních norem vztahujících se na tento typ zařízení.
- Při používání přístroje je nutné aplikovat **vodivý gel (sonogel)** určený pro kosmetické nebo přístrojové použití. Gel slouží ke zlepšení kontaktu aplikační hlavice s pokožkou a k zajištění správné funkce přístroje.
- Používejte přístroj pouze v doporučených intervalech. Častější nebo delší používání, než je uvedeno v návodu, **nezvyšuje účinnost** a může vést k nežádoucím reakcím pokožky.
- Výsledky používání se mohou lišit v závislosti na individuálních vlastnostech pokožky, způsobu použití a dodržování návodu k obsluze.

Podpora a dotazy

V případě nejasností, dotazů nebo pochybností ohledně používání přístroje se obraťte na naši zákaznickou podporu:

- Telefon: +420 737 196 160
- E-mail: mh@santadria.cz

Rádi vám poskytneme doplňující informace k obsluze přístroje.

Tento návod si pečlivě uschovejte pro případné pozdější použití.

Přejeme vám, aby vám přístroj BeautyRelax dobře sloužil při jeho používání v souladu s tímto návodem.

Tým BeautyRelax.cz

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Aplikace červeného světla s vlnovou délkou 650 nm patří mezi technologie využívané v oblasti **neinvazivní estetiké a masážní péče**. Příklad je určen k povrchové aplikaci na vybrané partie těla a je navržen tak, aby nedocházelo k porušení integrity pokožky. Žádná část aplikační hlavice během použití neproniká pod povrch kůže. Použití přístroje spadá do kategorie **neinvazivních aplikací**, při nichž může uživatel v průběhu použití vnímat mírné zahřívání pokožky v závislosti na zvoleném nastavení a individuální citlivosti. Příklad je určen k používání výhradně v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze, zejména pokud jde o doporučený čas a frekvenci použití. Technologie červeného světla s vlnovou délkou 650 nm je při dodržení podmínek použití uvedených výrobcem považována za **nízkozatěžující formu estetiké péče**. Výsledky používání se mohou lišit v závislosti na individuálních vlastnostech pokožky a způsobu použití.



Použití v profesionálním provozu a hygiena

Příklad využívající technologie neinvazivní estetiké péče jsou běžně používány v kosmetických, masážních a estetikých provozech. Při **komerčním použití** je nutné dodržovat platné hygienické předpisy a provozní řády dané legislativou příslušné země. Po každém uživateli je nutné povrch aplikačních hlavice očistit a dezinfikovat vhodným dezinfekčním prostředkem určeným pro povrchy přicházející do styku s pokožkou. Doporučuje se použití dezinfekce na bázi alkoholu aplikované na čistý hadřík, následné otření aplikačních částí a jejich důkladné osušení.

Právní a legislativní upozornění

Estetický přístroj **BeautyRelax BR-2912 BODYFACE SILHOUETTE** je určen pro **relaxační a estetickou masážní péči. Nejedná se o zdravotnický prostředek** ve smyslu platné legislativy.

Přístroj není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci jakýchkoli onemocnění.

Přístroj:

- nevyužívá jehly ani invazivní technologie,
- nenarušuje integritu pokožky,
- je určen výhradně k povrchové aplikaci.

Součástí přístroje jsou technologie, jako je radiofrekvence, ultrazvuk, vakuová masáž a červené světlo. Podmínky jejich **komerčního využívání** (požadované vzdělání, licence nebo odborná způsobilost) se mohou lišit v závislosti na legislativě jednotlivých států Evropské unie. Provozovatel je povinen se před zahájením komerčního používání seznámit s platnými právními předpisy v místě provozu.

Odpovědnost

Distributor/prodejce **SANTADRIA s.r.o.** nenese odpovědnost za používání přístroje v rozporu s tímto návodem k obsluze nebo s platnou legislativou v zemi, kde je přístroj používán. Přístroj smí být v rámci komerčního provozu používán pouze osobami, které splňují zákonné podmínky stanovené příslušnými právními předpisy.

Distributor/prodejce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje, nedodržení hygienických postupů nebo překročení doporučených parametrů uvedených v návodu.

UPOZORNĚNÍ



- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtete tento návod k obsluze, seznámte se se všemi vyobrazeními a návod si uschovejte pro případné pozdější použití.
- Nepoužívejte přístroj na pokožce postižené závažným kožním onemocněním, otevřenými ranami nebo podrážděním. V případě pochybností o vhodnosti používání přístroje doporučujeme konzultaci s lékařem.
- Pokud je přístroj používán více osobami, je nutné dodržovat zvýšené hygienické standardy. Po každém použití je třeba aplikační hlavice očistit a dezinfikovat vhodným prostředkem určeným pro povrchy přicházející do styku s pokožkou.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je mechanicky poškozený, nefunguje správně nebo byl vystaven působení vody.
- V případě poškození přístroje se nedotýkejte jeho vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj spadne na zem, může dojít k jeho poškození. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí (např. koupelna, sprcha, bazén).
- Přístroj není vodotěsný ani omyvatelný. Nesmí být ponořen do vody ani čištěn pod tekoucí vodou.
- Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Po každém použití jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě, pokud je to relevantní.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny, aby se zabránilo vzniku kondenzace.
- Přístroj není určen k používání dětmi ani osobami, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti neumožňují bezpečné používání bez dozoru.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na zdrojích tepla nebo v jejich bezprostřední blízkosti (např. radiátory, kamna, otevřený oheň).
- Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat, upravovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém a čistém prostředí, chráněném před prachem a vlhkostí.
- Během používání přístroj žádným způsobem nezakrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám.
- Distributor nenes odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v rozporu s tímto návodem k obsluze nebo bezpečnostními pokyny.
- Za škody na zdraví nebo majetku vzniklé v důsledku jiného než určeného způsobu použití přístroje nenes distributor odpovědnost v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT



Použití přístroje **není možné** u osob s těmito stavy:

- těhotenství
- nádorové onemocnění (aktuální nebo v anamnéze)
- kardiovaskulární onemocnění (včetně závažných srdečních onemocnění)
- implantovaný kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát
- epilepsie
- závažné poruchy nervového systému
- závažné poruchy imunitního systému
- žilní trombóza
- závažné poruchy krevního oběhu
- závažné poruchy srážlivosti krve
- těžká cukrovka (diabetes mellitus v závažném stadiu)
- závažné onemocnění jater nebo ledvin
- velmi vysoké hodnoty cholesterolu
- akutní virové onemocnění
- stav vysokých horeček
- anafylaxe
- chronický únavový syndrom
- hypertyreózou
- hypotyreózou
- jinými závažnými hormonálními poruchami
- polycystickými vaječníky
- na pokožce postižené aktivním kožním onemocněním
- na otevřených ranách, zánětech nebo podrážděné pokožce
- při fotosenzitivních kožních onemocněních
- v místě výskytu kovových implantátů nebo cizích těles
(výjimku tvoří zubní náhrady)
- u osob pod vlivem alkoholu nebo návykových látek
- u osob vyžadujících trvalý dohled
- během menstruace
- u osob, které nejsou schopny bezpečně vnímat průběh aplikace

V případě jakýchkoli pochybností o zdravotním stavu uživatele nebo vhodnosti použití přístroje **doporučujeme konzultaci s praktickým lékařem** před zahájením aplikace.

ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK

- Hlava
- Krk (přední i zadní strana)
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK

- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Stehna
- Zadeček
- Lýtka



Poznámka: párová oblast těla je brána jako jedna partie

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - RADIOFREKVENCE

- Obličej
- Krk
- Dekolt
- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Boční strana trupu
- Stehna
- Hýždě
- Lýtka



POVOLENÉ PARTIE APLIKAE – ČERVENÉ SVĚTLO 650NM

- Podbradek
- Paže
- Břicho
- Boky
- Stehna
- Lýtka
- Hýždě



DOPORUČENÍ

Přístroj využívá vysoce výkonné optické diody generující **červené světlo s vlnovou délkou 650 nm**, které je používáno v oblasti neinvazivní estetické péče. Intenzita světla je nastavena tak, aby při dodržení pokynů výrobce poskytovala požadované estetické účinky.

- Při používání přístroje se vždy vyhněte přímému pohledu do zdroje červeného světla.
- Před aktivací červeného světla si vždy nasadte ochranné textilní brýle, které jsou součástí balení.
- Přímé nasvícení očí může vést k poškození zraku.
- Přístroj nejprve správně přiložte na vybranou část těla, nasadte ochranné brýle a teprve poté aktivujte působení červeného světla.

Dodržování těchto pokynů je nezbytné pro bezpečné používání přístroje.


POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny a radiofrekvence se tak mohou na pleť lépe navázat. Při použití přístroje **nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.**




LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při používání přístroje **BeautyRelax** se snažte vyhnout oblastem lymfatických uzlin. Letmý nebo náhodný dotyk těchto oblastí nevadí, **dlouhodobou nebo opakovanou stimulaci lymfatických uzlin však nedoporučujeme**. Poloha lymfatických uzlin je znázorněna **velkými zelenými tečkami**.

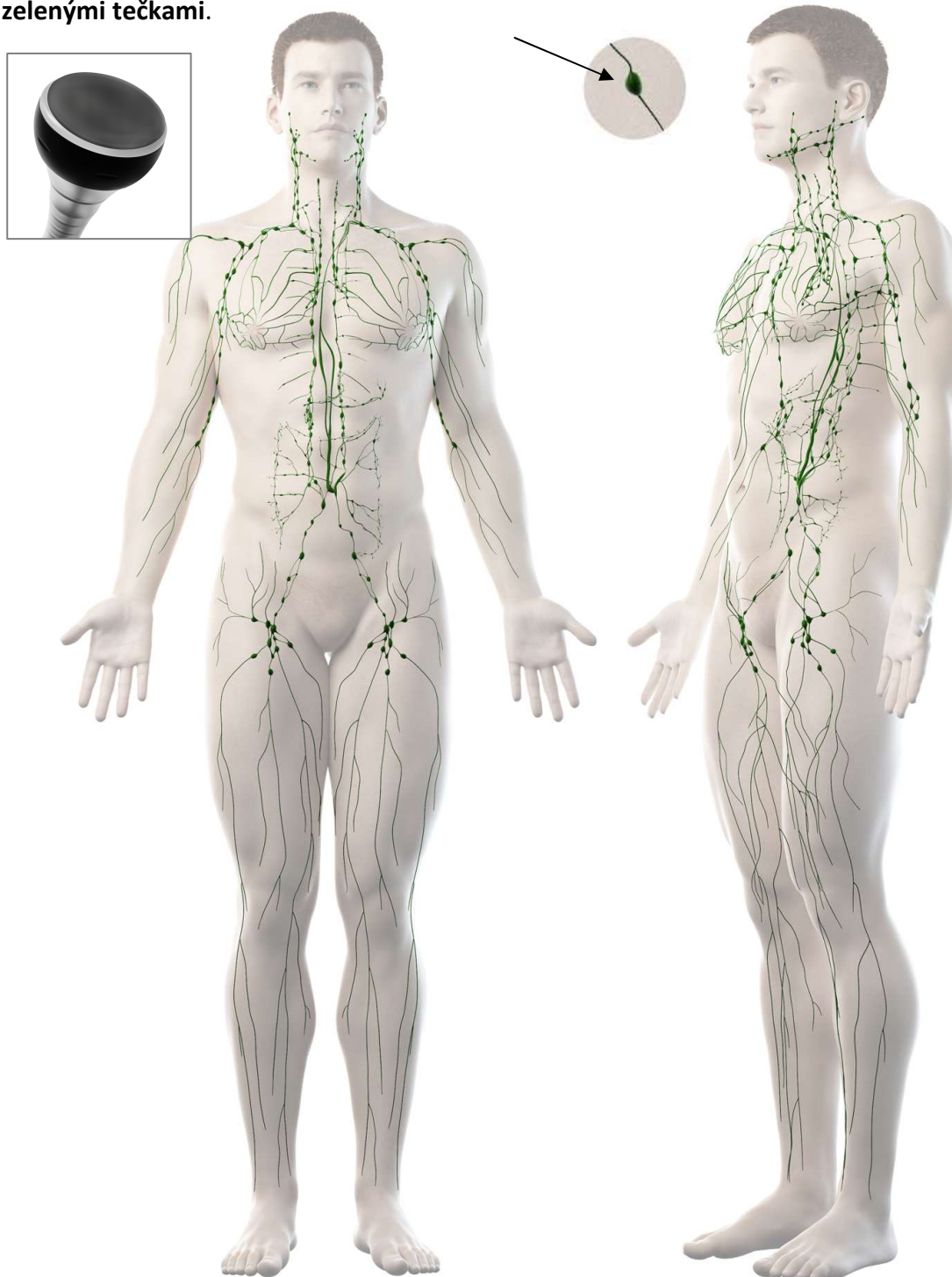


LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při používání přístroje **BeautyRelax** se snažte vyhnout oblastem lymfatických uzlin. Letmý nebo náhodný dotyk těchto oblastí nevadí, **dlouhodobou nebo opakovanou stimulaci lymfatických uzlin však nedoporučujeme**. Poloha lymfatických uzlin je znázorněna **velkými zelenými tečkami**.

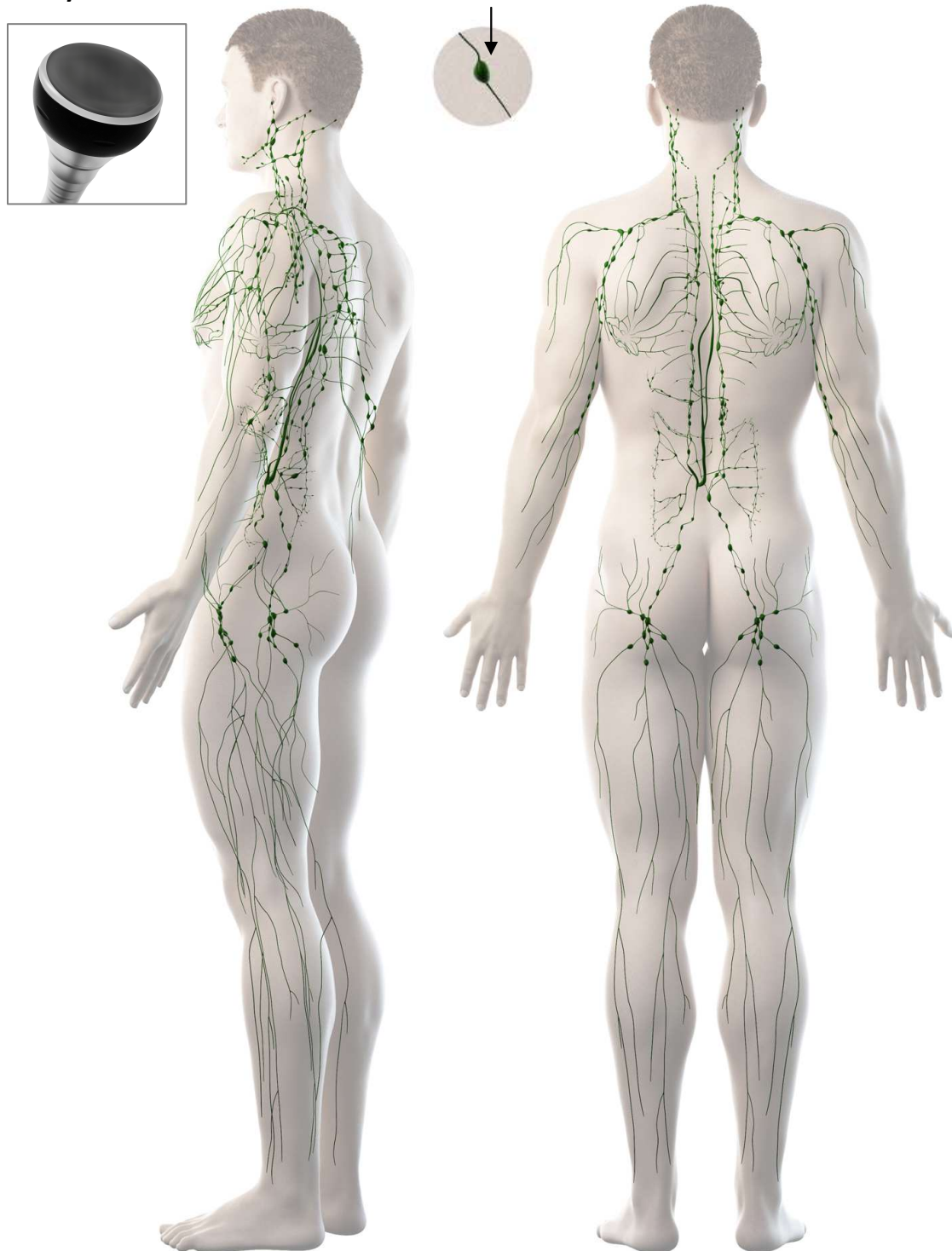

LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při používání přístroje **BeautyRelax** se snažte vyhnout oblastem lymfatických uzlin. Letmý nebo náhodný dotyk těchto oblastí nevadí, **dlouhodobou nebo opakovanou stimulaci lymfatických uzlin však nedoporučujeme**. Poloha lymfatických uzlin je znázorněna **velkými zelenými tečkami**.

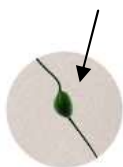

HLAVNÍ VÝHODY

- Přispívá k redukci výskytu jemných mimických vrásek.
- Napomáhá ke zlepšení pružnosti kontur obličeje.
- Podporuje zpevnění a vypnutí pleti.
- Stimuluje přirozené procesy spojené s remodelací kolagenních vláken.
- Napomáhá ke zmírnění viditelných projevů celulitidy.
- Přispívá ke zjemnění vzhledu strií a drobných jizviček.
- Podporuje stimulaci lymfatického systému končetin.
- Napomáhá k redukci tukové tkáně na vybraných tělesných partiích.
- Umožňuje provádění účinné podtlakové lymfatické masáže.
- Neinvazivní charakter aplikace bez porušení integrity pokožky.
- Bezpečné a komfortní používání při dodržení pokynů výrobce.
- Použití je zpravidla bez nepříjemných pocitů.

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

- Profesionální estetický přístroj určený pro použití na různých částech těla.
- Kombinuje více technologií do jednoho kompaktního zařízení.
- Nabízí velmi dobrý poměr mezi pořizovací cenou a užitnou hodnotou.
- Využívá moderní technologie běžně používané v oblasti neinvazivní estetické péče.
- Umožňuje aplikaci multipolární radiofrekvence pro povrchovou stimulaci pleti.
- Obsahuje technologii formování postavy pomocí světelné energie.
- Hlavice jsou vyrobeny z odolných materiálů, jako je kov, nerezová ocel a tvrzený plast.
- Dostatečně dlouhé kabely aplikačních hlavíc zajišťují komfortní manipulaci při používání.
- Možnost plynulého nastavení výkonu podle individuálních potřeb uživatele.
- Přehledné dotykové ovládání s podsvícenými tlačítky.
- Moderní a kompaktní provedení hlavní ovládací jednotky.
- Konstrukce přístroje je navržena s důrazem na dlouhou životnost.
- Součástí je spotřební materiál pro vakuovou drenáž (vyměnitelné filtrační tampónky).
- Vysoká variabilita použití díky více typům aplikačních hlavíc.
- Při použití radiofrekvence a ultrazvuku se používá běžně dostupný vodivý gel (sonogel).
- Celý set je uložen v odolném kovovém kufříku pro snadné přenášení.

TECHNICKÉ PARAMETRY


- Dávkování energie radiofrekvence: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
- Vlnová délka červeného světla: 650nm
- Rozsah síly podtlaku vakuového sání: 0 až 250Kpa
- Rozměry: 40x30x30cm
- Hmotnost: 10kg

OBSAH BALENÍ

- 1x Hlavní jednotka BeautyRelax BR-2912
- 1x Hlavice s radiofrekvencí a fotonovým světlem – 3 aplikační kolíčky
- 1x Hlavice s radiofrekvencí a fotonovým světlem – 4 aplikační kolíčky
- 1x Hlavice s radiofrekvencí a fotonovým světlem – 6 aplikačních kolíčků
- 1x Hlavice s podtlakovou drenáží a radiofrekvencí
- 1x Hlavice s ultrazvukem
- 8x Aplikátor s červeným světlem
- 1x Kovový kufřík
- 3x Plastový držák na všechny aplikační hlavice
- 1x Sada filtračních tampónků pro vakuovou hlavici
- 1x Sonogel 250ml
- 1x Napájecí kabel 220V
- 1x Elastický popruh pro uchycení hlavic s červeným světlem
- 1x Ochranné textilní brýle
- 1x Návod k obsluze

URČENO PRO VŠECHNY TYPY POSTAV

Používání přístroje **BeautyRelax** je vhodné pro ženy i muže bez ohledu na typ postavy nebo lokalizaci tukové tkáně. Použití je určeno osobám, které splňují podmínky uvedené v návodu k obsluze a nevztahuje se na osoby, u nichž je uvedena některá ze stavů, kdy použití není doporučeno.

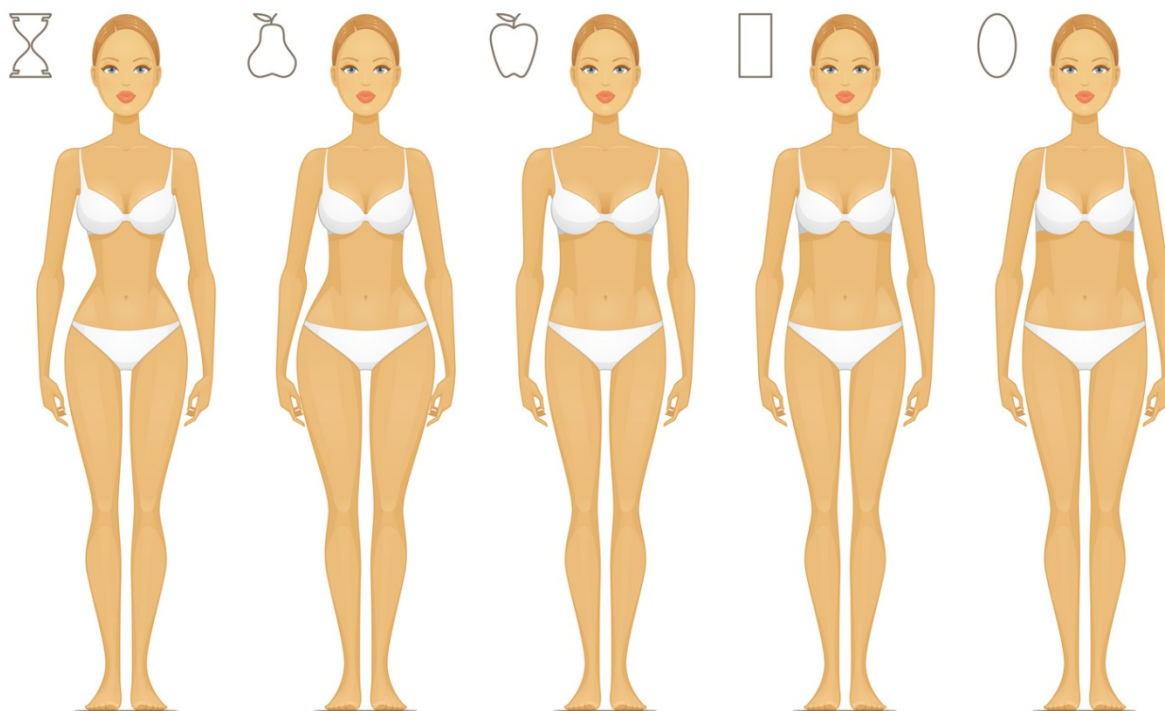

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o Vznik vrásek je přirozenou součástí procesu stárnutí pokožky. S přibývajícím věkem dochází k postupné ztrátě elasticity pleti a ke zpomalení buněčné obnovy. Tyto změny vedou ke snížení přirozené produkce kolagenu, který je klíčový pro pevnost a pružnost pokožky. V důsledku těchto procesů se na povrchu pleti objevují rýhy, které se postupně prohlubují a mohou zasahovat až do vrstvy dermis, tedy podpůrné vrstvy kůže.



Výsledkem je pleť s viditelnějšími a hlubšími vráskami. Vrásky lze rozdělit do dvou základních skupin. Dynamické vrásky vznikají opakovaným stahováním obličejových svalů a obvykle se začínají objevovat přibližně kolem 35. roku života. Statické vrásky jsou důsledkem povolení hlubších vrstev kůže a snížené tvorby kolagenu a zpravidla se objevují kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti péče o vrásky lze rozdělit na invazivní a neinvazivní. Invazivní metody zahrnují chirurgické zákroky nebo injekční aplikace, při nichž dochází k narušení povrchu pokožky. Tyto postupy jsou spojeny s vyšší zátěží pro organismus a delší dobou rekonvalescence. Neinvazivní metody zahrnují používání kosmetických přípravků, jako jsou krémy, gely, oleje nebo séra, a také přístrojové aplikace využívající technologie určené k povrchové stimulaci pokožky. Tyto technologie se zaměřují na podporu přirozených procesů v pleti, zejména stimulaci kolagenních a elastických vláken. Mezi často využívané neinvazivní technologie patří radiofrekvence, která je oblíbená pro svůj příznivý poměr mezi šetrností a estetickým efektem při pravidelném používání.

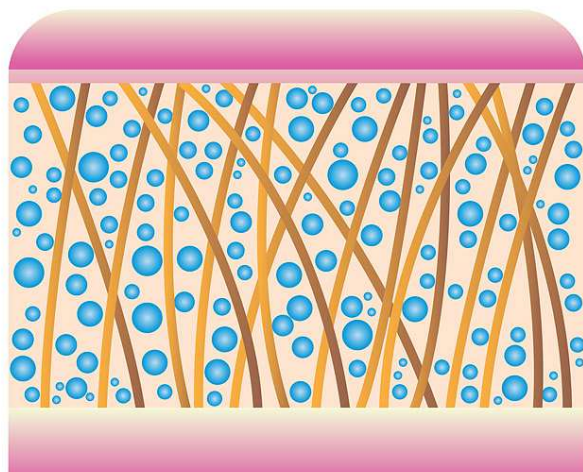

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

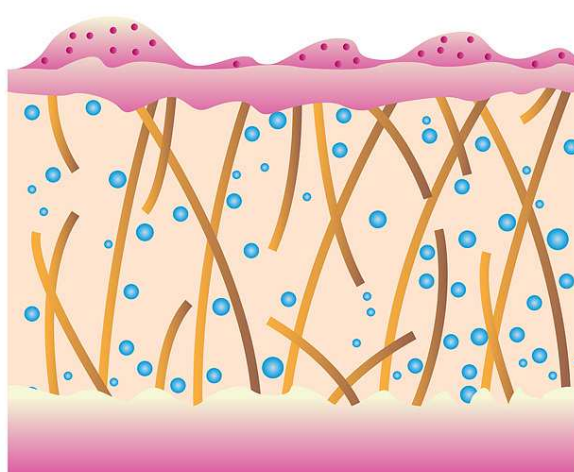

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Bodyface Silhouette je estetický přístroj určený k **neinvazivní povrchové péči o pokožku a tělo**. Přístroj je navržen pro použití v oblasti kosmetické a masážní péče v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Přístroj je vybaven několika aplikačními hlavicemi, které umožňují využití různých **fyzikálních principů běžně používaných v oblasti estetické péče**. Jednotlivé funkce přístroje jsou určeny k povrchové stimulaci vybraných částí těla bez porušení integrity pokožky. Použití přístroje je založeno na **neinvazivní aplikaci**, při níž nedochází k pronikání aplikačních částí pod povrch kůže. Intenzitu působení lze nastavovat v rámci doporučených hodnot uvedených výrobcem. Přístroj je konstruován s ohledem na **bezpečné a komfortní používání** při dodržení stanovených podmínek použití. Konstrukční provedení přístroje a použité materiály jsou navrženy tak, aby umožňovaly **opakované používání** a splňovaly požadavky kladené na zařízení tohoto typu. Přístroj je určen k použití v domácím i profesionálním prostředí v souladu s platnými právními a hygienickými předpisy.



ULTRAZVUKOVÉ VLNY



Aplikační hlavice generuje **ultrazvukové vlnění** určené pro povrchovou neinvazivní aplikaci. Působení probíhá lokálně v rozsahu nastavených provozních parametrů přístroje, bez narušení povrchu pokožky. Intenzitu aplikace lze regulovat prostřednictvím ovládací jednotky dle pokynů výrobce. Přístroj je určen výhradně pro **estetické a masážní použití**.



RADIOFREKVENCE



Aplikační hlavice generuje **radiofrekvenční energii** s definovaným výkonem a frekvencí. Působení probíhá **neinvazivně a povrchově**, v souladu s nastavenými provozními parametry přístroje. Intenzitu aplikace lze plynule regulovat prostřednictvím ovládací jednotky. Přístroj je určen pro **estetickou a masážní péči**, nikoli k léčebným účelům.



RADIOFREKVENCE VE TŘECH PROVEDENÍCH

BODYFACE
SILHOUETTE
powered by
beautyrelax
health and beauty equipment

3 kolíčky

BODYFACE
SILHOUETTE
powered by
beautyrelax
health and beauty equipment

4 kolíčky

BODYFACE
SILHOUETTE
powered by
beautyrelax
health and beauty equipment

6 kolíčků

VAKUOVÉ NASÁVÁNÍ S RADIOFREKVENCÍ



VAKUOVÁ MASÁŽ

- Využívá řízený podtlak k mechanické stimulaci povrchu pokožky
- Určena pro neinvazivní estetickou aplikaci na vybrané partie těla
- Intenzita podtlaku je nastavitelná podle zvoleného programu a komfortu uživatele



Aplikátor s vakuovým sáním a radiofrekvencí

- Pracuje v cyklickém režimu nasátí a uvolnění pokožky
- Aplikace probíhá plynulým nebo bodovým pohybem aplikační hlavice
- Podtlaková stimulace může být kombinována s působením radiofrekvence

Charakter aplikace

- Povrchová mechanická stimulace bez porušení integrity pokožky
- Přizpůsobitelné použití pro různé tělesné oblasti
- Určeno pro estetickou a masážní péči



ČERVENÉ SVĚTLO



Červené světlo s vlnovou délkou 650 nm je využíváno v oblasti estetické a masážní péče jako forma neinvazivní světelné stimulace. Použití této technologie vychází z dlouhodobého vývoje přístrojových metod, které jsou navrženy s důrazem na komfort uživatele a šetrnost aplikace. Světelná aplikace probíhá povrchově, bez mechanického zásahu a bez porušení integrity pokožky. Přístroj umožňuje nastavení délky a intenzity působení podle zvoleného programu a individuálních preferencí. V rámci estetických přístrojů se červené světlo řadí mezi technologie určené k pravidelnému používání, které nevyžaduje zvláštní režim před ani po aplikaci. Použití je koncipováno tak, aby bylo časově nenáročné a nenarušovalo běžný denní režim uživatele.

Červené světlo může být využíváno samostatně nebo jako doplňková funkce v rámci kombinovaných přístrojových programů estetické péče.

POPIS PŘÍSTROJE



1. Dotykový displej

2. Hlavní jednotka

POPIS PŘÍSTROJE

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Šroubky pro uchycení držáku na aplikační hlavice 2. Vstup pro kabel hlavice s červeným světlem 3. Vstup pro kabel hlavice s vakuovým sáním 4. Vstup pro kabel hlavice s radiofrekvencí - 6 kolíčků 5. Vstup pro kabel hlavice s radiofrekvencí - 4 kolíčky 6. Vstup pro kabel hlavice s radiofrekvencí - 3 kolíčky | <ol style="list-style-type: none"> 7. Vstup pro kabel hlavice s ultrazvukem 8. Hlavní vzduchový filtr 9. Otočné tlačítko - síla vakuového sání 10. Vstup pro napájecí kabel 11. Umístění pojistky 12. Hlavní tlačítko ON/OFF |
|--|--|




POPIS PŘÍSTROJE

1. Šroubky pro uchycení držáku hlavic s červeným světlem
2. Mřížka ventilátoru pro chlazení přístroje (nikdy nezakrývejte)



POPIS PŘÍSTROJE

Aplikační hlavice

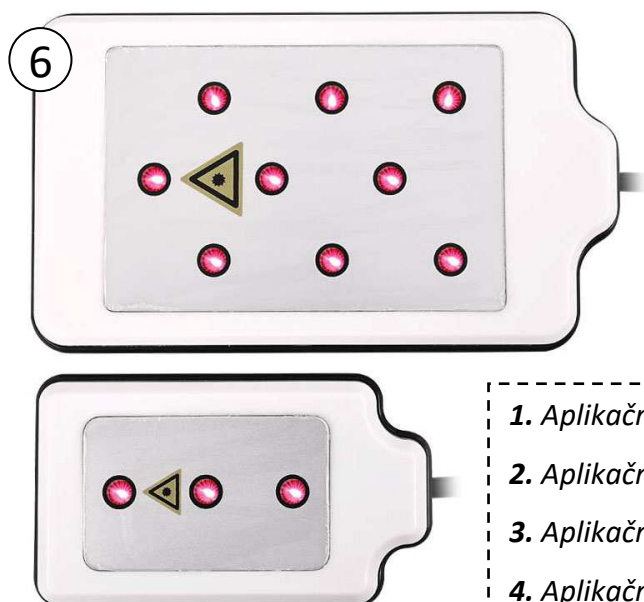

1. Aplikační hlavice - **ultrazvukové vlny**
2. Aplikační hlavice - **vakuové nasávání s radiofrekvencí**
3. Aplikační hlavice - **radiofrekvence 4 kolíčky**
4. Aplikační hlavice - **radiofrekvence 3 kolíčky**
5. Aplikační hlavice - **radiofrekvence 6 kolíčků**
6. Aplikační hlavice - **červené světlo**

POPIS DISPLEJE - HLAVNÍ NABÍDKA



1. Ultrazvukové vlny



2. Vakuové nasávání s radiofrekvencí




3. Radiofrekvence - 3 kuličky



4. Radiofrekvence - 6 kuličeků




5. Radiofrekvence - 4 kuličky

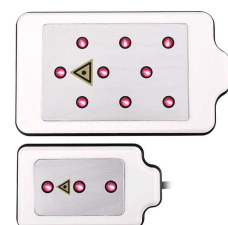

6. Červené světlo

POPIS DISPLEJE - ULTRAZVUKOVÉ VLNY

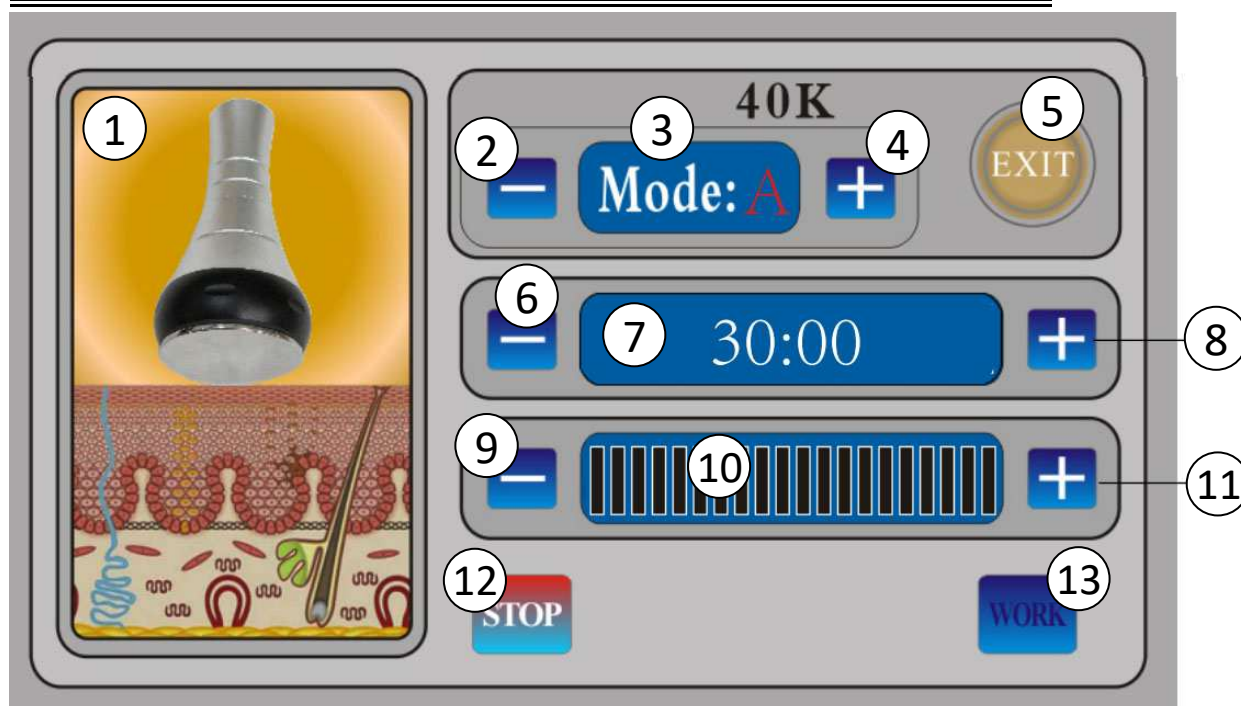

1. Grafické zobrazení průběhu působení ultrazvuku
2. Změna módu působení ultrazvuku
3. Zobrazení názvu módu působení ultrazvuku
4. Změna módu působení ultrazvuku
5. Tlačítko **EXIT** - návrat do hlavní nabídky
6. Snížení času aplikace
7. Zobrazení času aplikace
8. Zvýšení času aplikace
9. Snížení intenzity působení ultrazvuku
10. Zobrazení intenzity působení ultrazvuku
11. Zvýšení intenzity působení ultrazvuku
12. Tlačítko **STOP** - zastavení působení ultrazvuku
13. Tlačítko **WORK** - zahájení aplikace ultrazvukem


MODE A, MODE B, MODE C, MODE D

Různé módy působení ultrazvuku. Ultrazvuk pracuje přerušovaně s různými intervaly. Zvolte si takový, který vám bude při použití příjemný na pleti. Celkový efekt na tukovou tkáň je při všech módech srovnatelný.


NASTAVENÍ INTENZITY ULTRAZVUKU

Každý uživatel může vnímat působení přístroje odlišně v závislosti na konkrétní části těla a zvoleném nastavení. Z tohoto důvodu je přístroj vybaven možností plynulého nastavení intenzity, aby bylo možné použití přizpůsobit individuálním preferencím a komfortu. Intenzitu ultrazvuku lze na ovládacím panelu nastavit v několika úrovních. Doporučuje se vždy začínat na nejnižší hodnotě a výkon zvyšovat postupně. Nastavení by mělo odpovídat subjektivnímu vnímání uživatele a nemělo by vyvolávat nepříjemné pocity. Neexistuje univerzální hodnota intenzity vhodná pro všechny situace. Vyšší nastavení výkonu neznamena vyšší účinnost ani rychlejší dosažení výsledků. Použití přístroje je určeno k postupné a kontrolované aplikaci v souladu s doporučenými časovými intervaly.

Při používání přístroje je vhodné respektovat doporučené přestávky mezi jednotlivými aplikacemi a řídit se pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Přístroj je navržen pro neinvazivní estetické použití s důrazem na bezpečnost a uživatelský komfort.

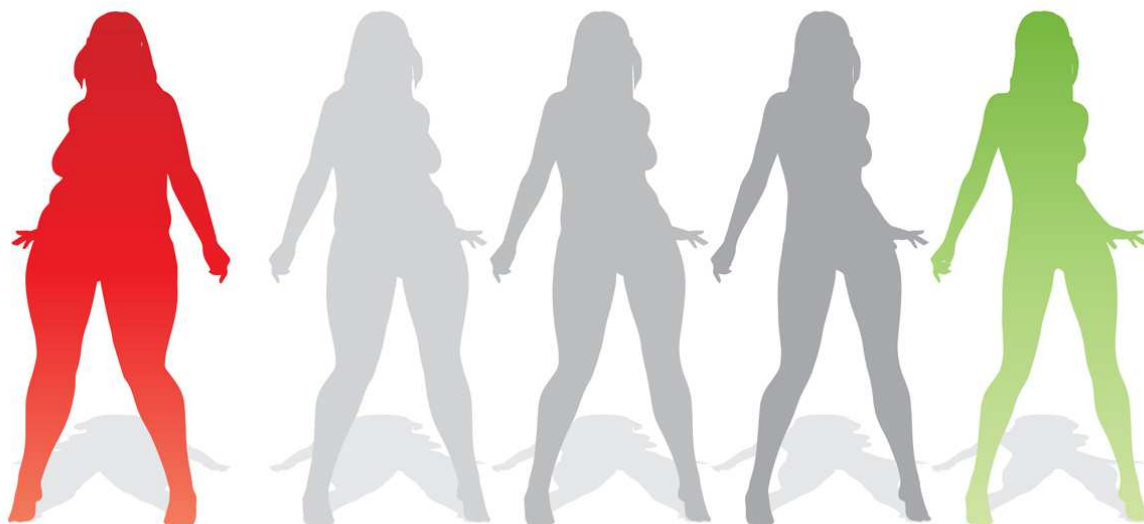


POPIS DISPLEJE - VAKUOVÉ SÁNÍ

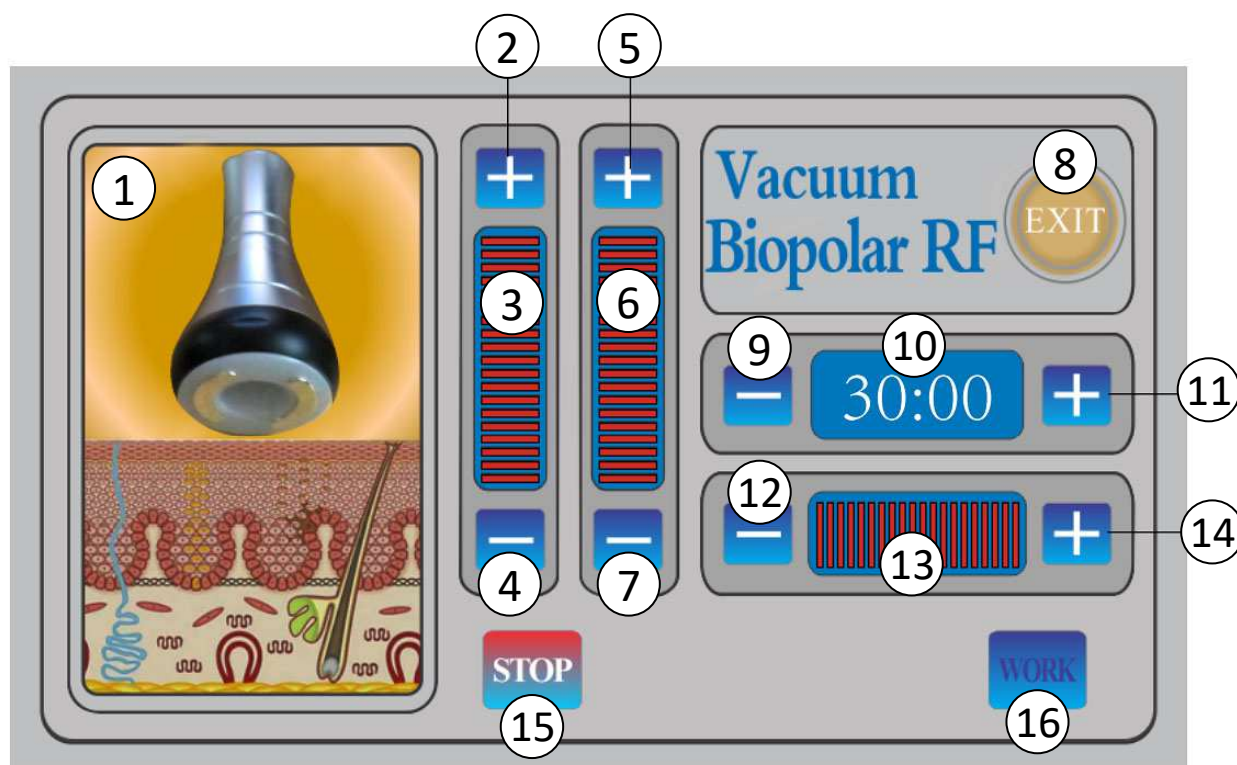

1. Grafické zobrazení průběhu působení vakuového sání
2. Zvýšení času vytváření podtlaku
3. Ukazatel délky času podtlaku
4. Snížení času vytváření podtlaku
5. Zvýšení času uvolnění podtlaku
6. Ukazatel délky času uvolnění podtlaku
7. Snížení času uvolnění podtlaku
8. Tlačítko **EXIT** - návrat do hlavní nabídky
9. Snížení času aplikace vakuovou hlavicí
10. Zobrazení času
11. Zvýšení času aplikace vakuovou hlavicí
12. Snížení výkonu radiofrekvence vakuové hlavice
13. Zobrazení výkonu radiofrekvence
14. Zvýšení výkonu radiofrekvence vakuové hlavice
15. Tlačítko **STOP** - zastavení působení činnosti vakuové hlavice
16. Tlačítko **WORK** - zahájení aplikace pomocí vakuové hlavice

POPIS DISPLEJE


RADIOFREKVENCE 3 KOLÍČKY

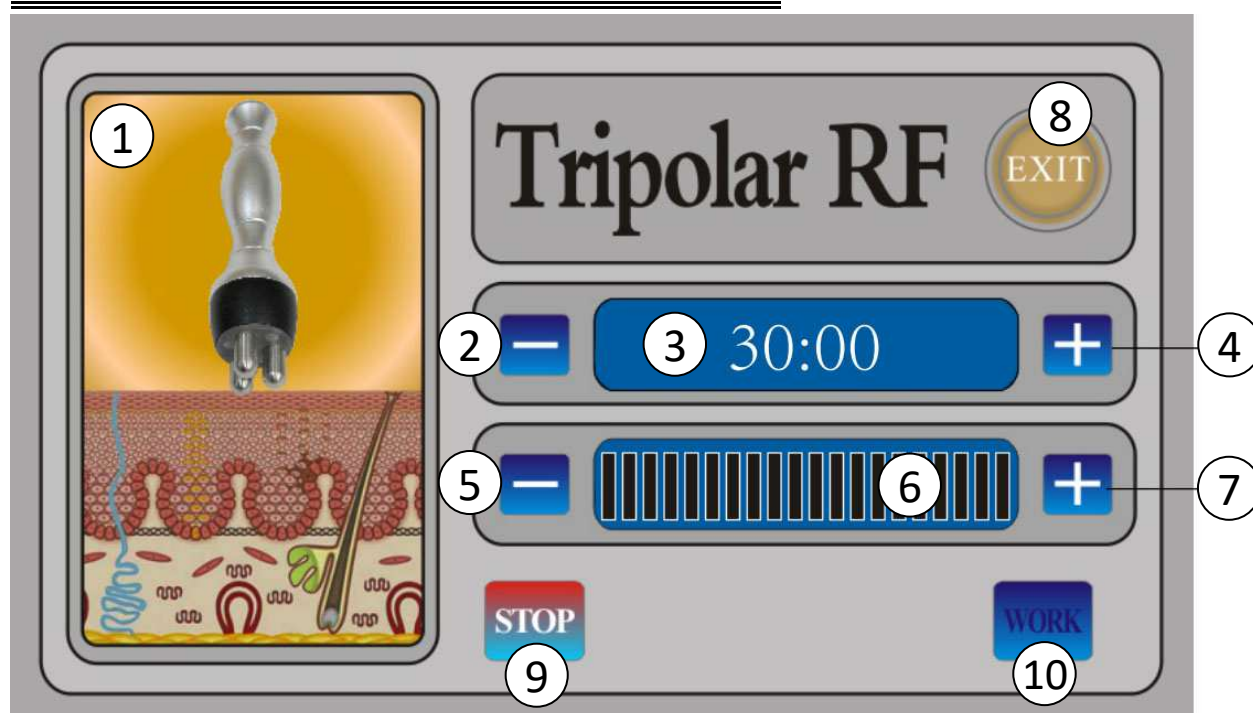

1. Grafické zobrazení průběhu působení radiofrekvence
2. Snížení času působení radiofrekvence
3. Ukazatel délky času radiofrekvence
4. Zvýšení času působení radiofrekvence
5. Snížení výkonu působení radiofrekvence
6. Ukazatel výkonu působení radiofrekvence
7. Zvýšení výkonu působení radiofrekvence
8. Tlačítko **EXIT** - návrat do hlavní nabídky
9. Tlačítko **STOP** - zastavení působení činnosti radiofrekvence
10. Tlačítko **WORK** - zahájení aplikace pomocí radiofrekvence

POPIS DISPLEJE


RADIOFREKVENCE 6 KOLÍČKŮ

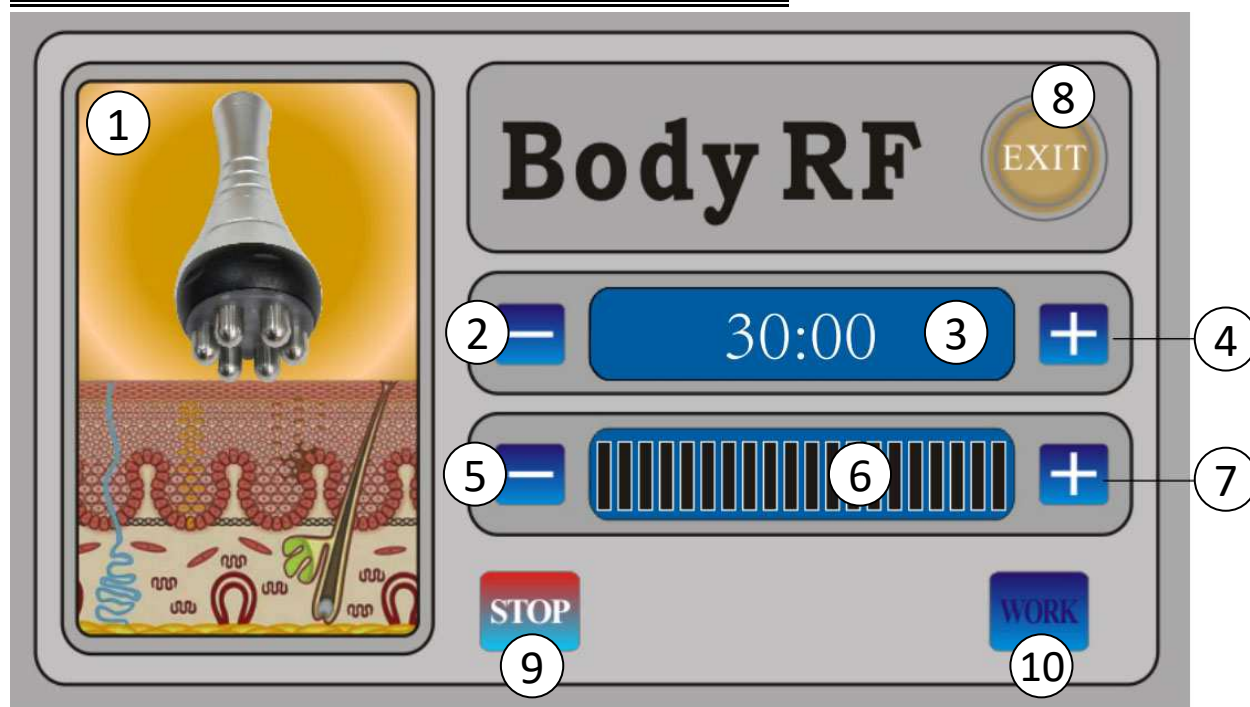

1. Grafické zobrazení průběhu působení radiofrekvence
2. Snížení času působení radiofrekvence
3. Ukazatel délky času radiofrekvence
4. Zvýšení času působení radiofrekvence
5. Snížení výkonu působení radiofrekvence
6. Ukazatel výkonu působení radiofrekvence
7. Zvýšení výkonu působení radiofrekvence
8. Tlačítko **EXIT** - návrat do hlavní nabídky
9. Tlačítko **STOP** - zastavení působení činnosti radiofrekvence
10. Tlačítko **WORK** - zahájení aplikace pomocí radiofrekvence


POPIS DISPLEJE

RADIOFREKVENCE 4 KOLÍČKY

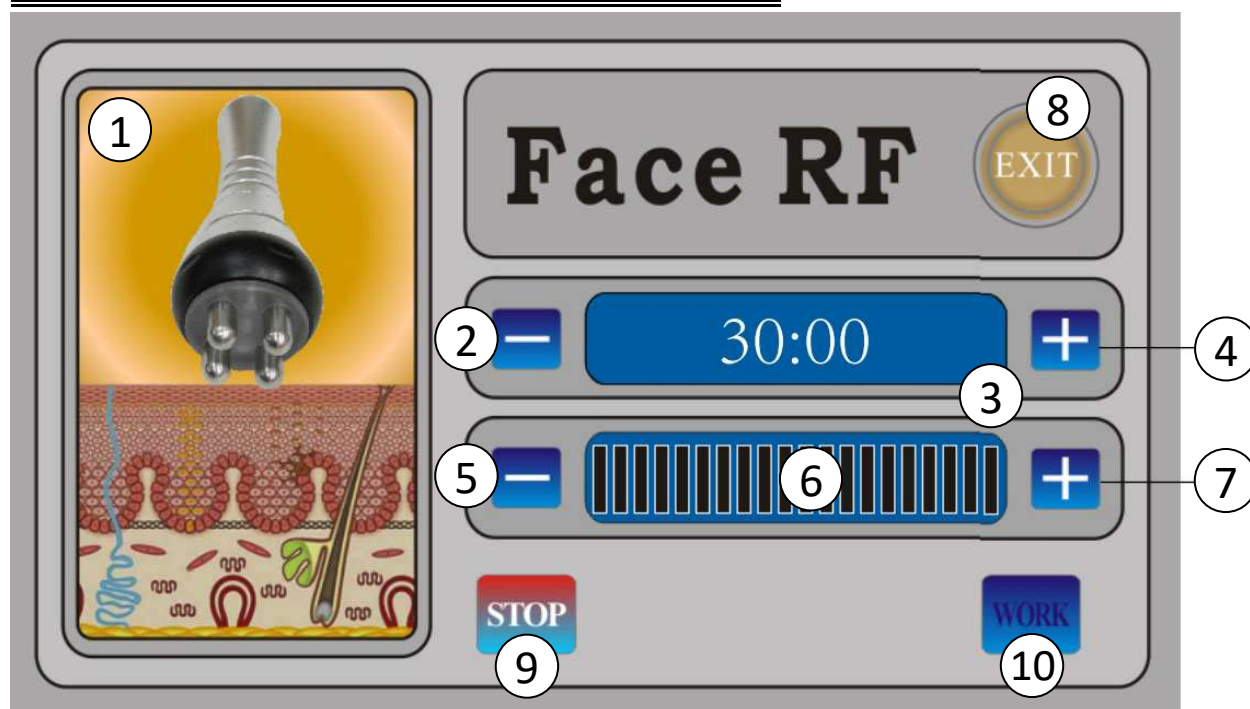

1. Grafické zobrazení průběhu působení radiofrekvence
2. Snížení času působení radiofrekvence
3. Ukazatel délky času radiofrekvence
4. Zvýšení času působení radiofrekvence
5. Snížení výkonu působení radiofrekvence
6. Ukazatel výkonu působení radiofrekvence
7. Zvýšení výkonu působení radiofrekvence
8. Tlačítko **EXIT** - návrat do hlavní nabídky
9. Tlačítko **STOP** - zastavení působení činnosti radiofrekvence
10. Tlačítko **WORK** - zahájení aplikace pomocí radiofrekvence

POPIS DISPLEJE - ČERVENÉ SVĚTLO

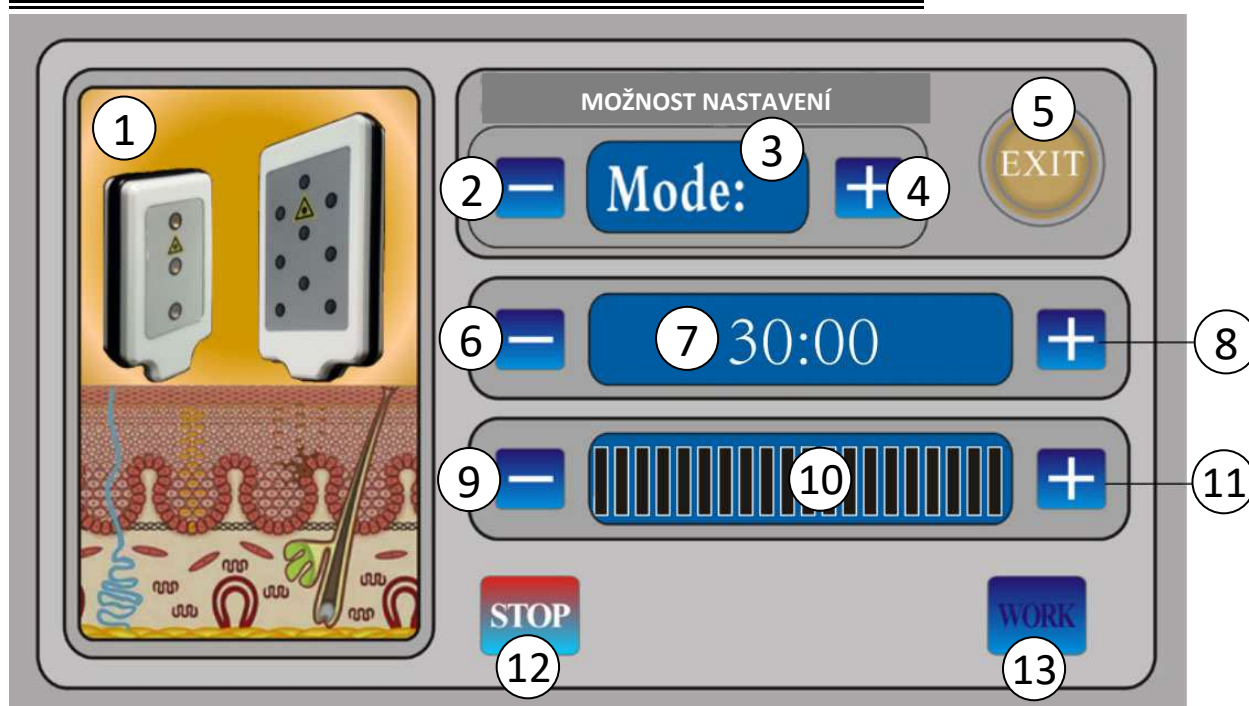

1. Grafické zobrazení průběhu působení světla
2. Změna módu působení světla
3. Zobrazení názvu módu působení světla
4. Změna módu působení světla
5. Tlačítko **EXIT** - návrat do hlavní nabídky
6. Snížení času aplikace
7. Zobrazení času aplikace
8. Zvýšení času aplikace
9. Snížení intenzity působení světla
10. Zobrazení intenzity působení světla (10 úrovní)
11. Zvýšení intenzity působení světla
12. Tlačítko **STOP** - zastavení působení světla
13. Tlačítko **WORK** - zahájení použití světla


MODE A, MODE B, MODE C, MODE D

Nastavení **MODE** ovlivňuje režim působení červeného světla. Zda aplikační hlavice svítí kontinuálně nebo přerušovaně v různých rychlostech blikání. Pro používání je primárně určen program se stálým = kontinuálním působením červeného světla.

INSTALACE PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE

Připojte k hlavní jednotce všechny aplikační hlavice. Vstupy se nachází na zadní straně hlavní jednotky. **Vždy dbejte na to, aby byl konektor správně zapojen do zdířky ve správném úhlu a nadoraz. Konektor má přesně daný úhel, pod kterým ho lze zapojit do zdířky.** Úhel je dán vykrojenou plochou, která přesně zapadne (zelený symbol na spodním obrázku). Instalaci aplikačních hlavic provádějte při vypnutém přístroji.


Konektor aplikační hlavice radiofrekvence, ultrazvukových vln a světla mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. **Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.**

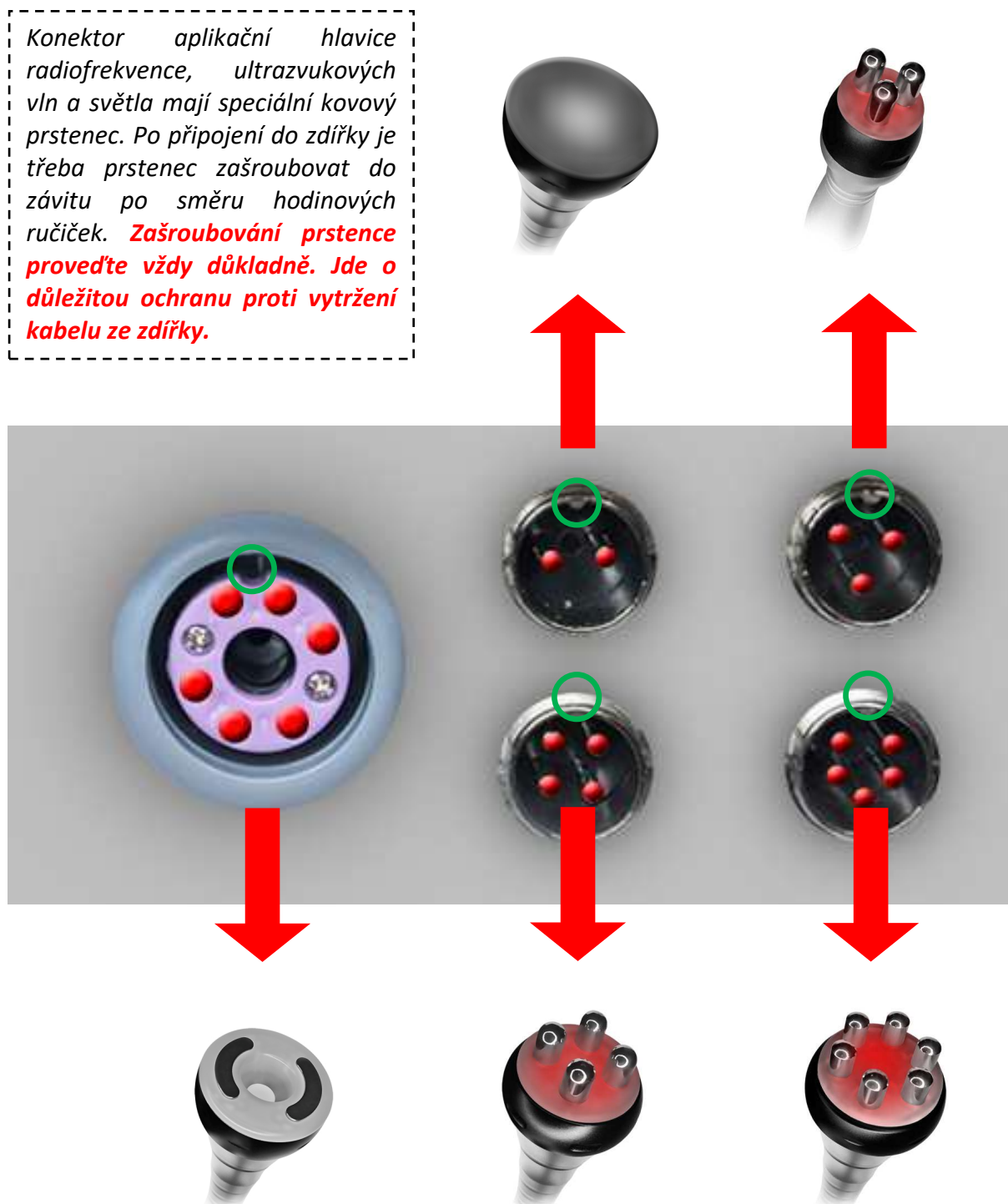

INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁKY HLAVIC




Součástí balení jsou tři držáky. Slouží pro uchycení aplikačních hlavic. Držáky připevněte jednoduše k hlavní jednotce pomocí šroubků, které jsou v závitech již umístěny. Šroubky odšroubujte, přiložte držák a zpět zašroubujte. Použijte křížový šroubovák. Šroubky neutahujte příliš velkou silou. Mohlo by dojít k prasknutí plastového držáku. Může se stát, že bude třeba šroubky po nějakém čase znovu dotáhnout. Hlavní jednotku přístroje umístěte vždy na rovnou plochu. Výdechy ventilátoru na bočních stranách přístroje nesmí být nikdy zakryty. Mohlo by dojít k přehřátí přístroje!

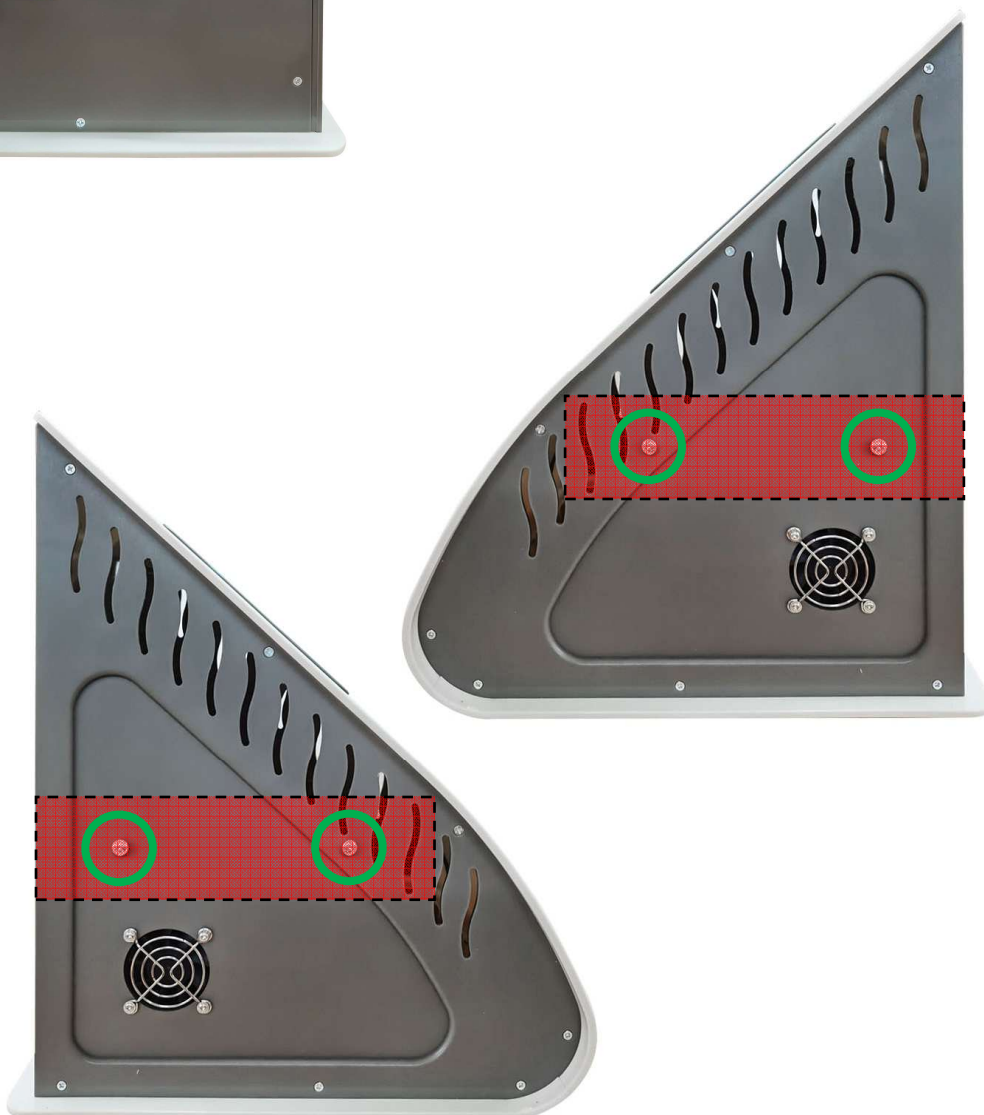

PŘÍPADNÁ VÝMĚNA POJISTKY

Přístroj je vybaven pojistkou. Slouží jako ochrana přístroje v případech, kdy by ve vaší elektrické síti došlo k přepětí nebo jiné technické závadě. Pojistka zabrání působení elektrického přepětí, což by vedlo k fatálnímu poškození přístroje. Pojistku je v tomto případě nezbytné vyměnit za novou. Pokud je přístroj připojen k napájecímu kabelu, ale přesto nefunguje, vždy zkontrolujte pojistku a případně ji vyměňte za novou. Pokud budete potřebovat nové náhradní pojistky, kontaktujte prosím prodejce/distributora.

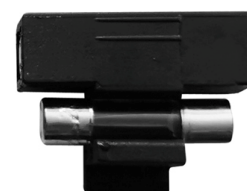

INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ FILTR


Pokud přístroj uvádíte do provozu poprvé, je třeba instalovat na hlavní jednotku filtr. Filtr je zodpovědný za to, aby se do vzduchového systému napojeného k čerpadlu nedostaly žádné nečistoty. Filtr je bezúdržbový. Není třeba provádět výměnu. Pro instalaci stačí filtrační kazetu zasunout do dvou otvorů. Kazetu vždy zatlačte nadoraz. Není třeba žádného dalšího šroubování. Bez instalace filtrační kazety není možné provozovat hlavici s vakuovým nasáváním.



VÝSLEDNÁ PODOBA PŘÍSTROJE PO INSTALACI



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ULTRAZVUK

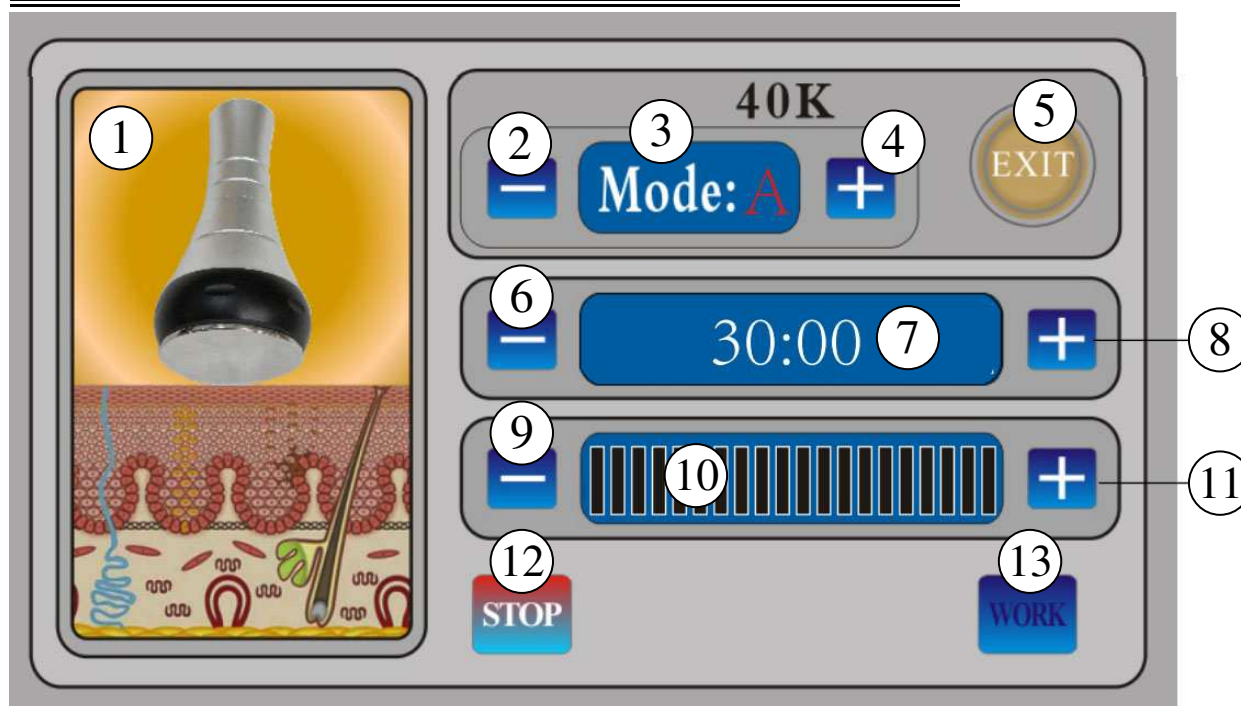

1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 1 – zapnuto. Na displeji se zobrazí hlavní nabídka. Pro využití ultrazvukových vln zvolte z nabídky položku **Cavitation**.
2. Pomocí tlačítek (2) a (4) zvolte režim působení ultrazvuku. **MODE A**, **MODE B**, **MODE C**, **MODE D** Různé módy působení ultrazvuku. Ultrazvuk pracuje přerušovaně s různými intervaly. Zvolte si takový, který vám bude při použití příjemný na pleti. Celkový efekt na tukovou tkáň je při všech módech srovnatelný.
3. Pomocí tlačítek (6) a (8) zvolte čas aplikace dle vašeho požadavku.
4. Pomocí tlačítek (9) a (11) zvolte intenzitu působení ultrazvuku. Rozsah nastavení je od hodnoty 1 až 20. Vždy začínějte od hodnoty 1 a přidávejte pomalu se zvýšenou opatrností.
5. Pomocí tlačítka **WORK** (13) zahájíte aplikaci pomocí ultrazvukových vln. Aplikační hlavice nyní generuje ultrazvukové vlny. Průběh aplikace zobrazuje animace na levé straně displeje (1).
6. Pomocí tlačítka **STOP** (12) můžete použití kdykoliv přerušit a znovu pokračovat pomocí tlačítka **WORK** (13).
7. Pomocí tlačítka **EXIT** (5) se vrátíte do hlavní nabídky.

8. Přístroj můžete vypnout pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 0 – vypnuto. Displej zhasne. Po skončení používání přístroje doporučujeme vyčkat 5 až 10 minut, aby měly ventilátory možnost elektroniku přístroje ochladit před vypnutím přístroje.

ČAS APLIKACE - ULTRAZVUK

Délka aplikace ultrazvukem by neměla překročit 20 minut na jednu partii. U párových částí těla se doporučuje rozdělit čas rovnoměrně mezi obě strany. V rámci jednoho dne je vhodné aplikovat přístroj maximálně na dvě oblasti. Opakované použití na stejné partii se doporučuje nejdříve po uplynutí 7 dní. Mezi jednotlivými aplikacemi je vhodné ponechat časový odstup. Přestávky mezi použitím jsou součástí doporučeného režimu a slouží k zachování komfortu a bezpečnosti při používání přístroje. Použití přístroje by mělo vždy probíhat v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ HLAVICE ULTRAZVUKEM

Při použití hlavice s technologií ultrazvuku je nezbytné aplikovat na povrch pleti dostatečné množství sonogelu. **Hlavice se nesmí používat na suchou pokožku.** V průběhu použití sonogel z pleti postupně vysychá. **Průběžně tedy gel doplňujte,** aby hlavice stále po gelu klouzala.

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK



UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - ULTRAZVUK

PAŽE



Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na rukou. Aplikační hlavici přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně masírujte vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujete se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.



Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem masírujte postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.

PAS & BŘÍŠKO

Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživém pohybu. Takto masírujte celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto masírujte celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.

HÝŽDĚ

Aplikační hlavici se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.

Aplikační hlavici se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.

Aplikační hlavici se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto masírovat celou oblast hýždí.


STEHNA & LÝTKA

Aplikační hlavicí se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.


Aplikační hlavicí se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavicí se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete masírovat přední i zadní část končetiny.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - VAKUOVÉ SÁNÍ

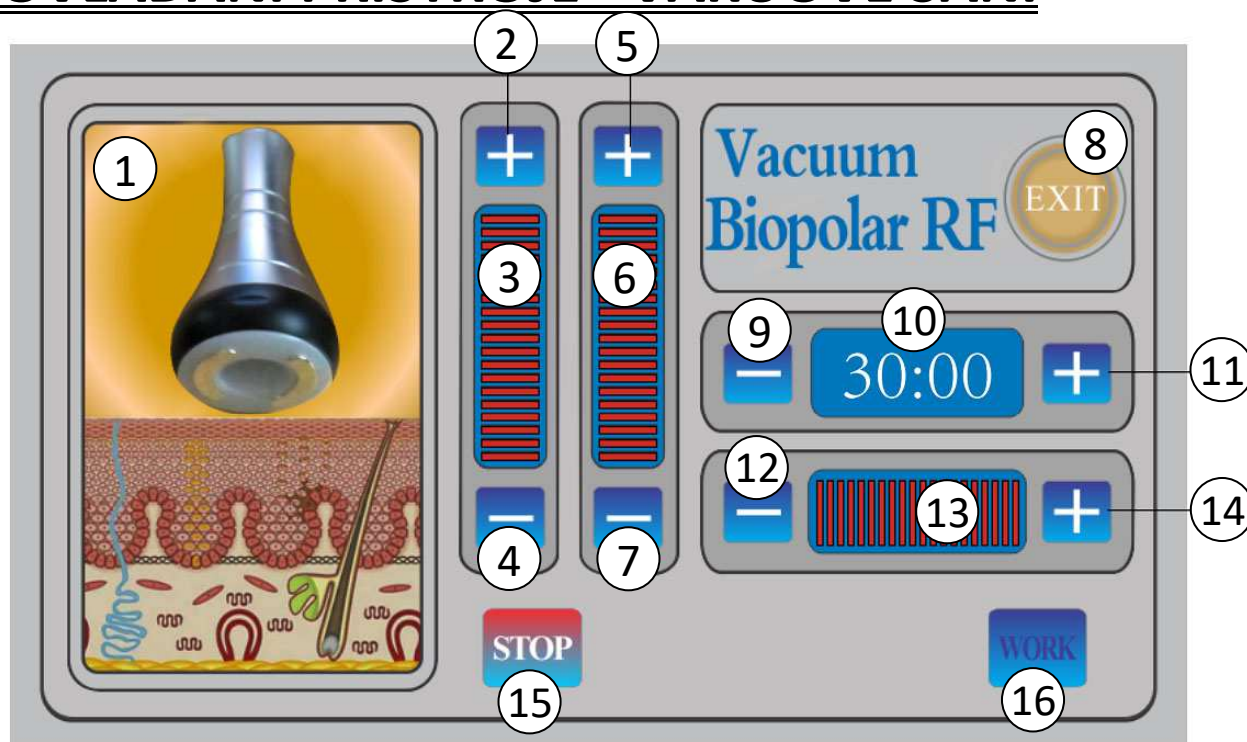

1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 1 – zapnuto. Na displeji se zobrazí hlavní nabídka. Pro využití ultrazvukových vln zvolte z nabídky položku **Vacuum+Bipolar RF**.
2. Pomocí tlačítek (2) a (4) si můžete nastavit délku vakuového sání v rozsahu hodnoty od 1 do 20 (ukazatel 3).
3. Pomocí tlačítek (5) a (7) si můžete nastavit délku uvolnění vakua v rozsahu hodnoty od 1 do 20 (ukazatel 6).
4. Pomocí tlačítek (9) a (11) si můžete nastavit čas aplikace vakuovou hlavicí (ukazatel 10).
5. Pomocí tlačítek (12) a (14) si můžete nastavit výkon radiofrekvence. Rozsah nastavení je od hodnoty 1 až 20 (ukazatel 13). Vždy začínejte od hodnoty 1 a přidávejte pomalu se zvýšenou opatrností. Řídit se můžete vnímáním tepla, které je průvodním jevem působení radiofrekvence. Pokud žádnou hodnotu nenastavíte, funkce působení radiofrekvence bude vypnuta.
6. Stiskněte tlačítko **WORK (16)** pro zahájení používání vakuové hlavice.

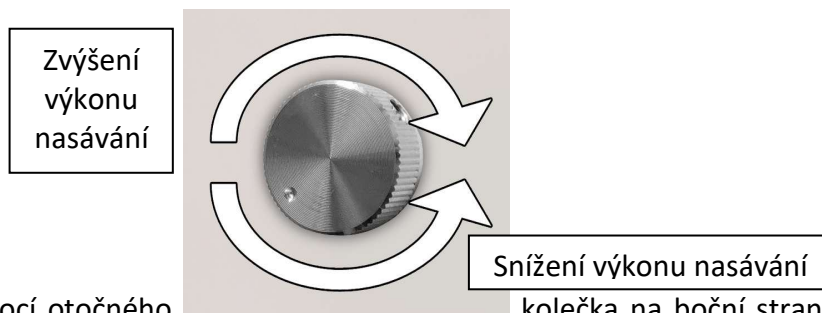

- 7.** Pomocí otočného kolečka na boční straně si můžete nastavit sílu působení vakuového sání. Výkon zvyšujte vždy pomalu se zvýšenou opatrností.
- 8.** V průběhu působení vakuového sání můžete slyšet jemné cvakání. Jedná se o průvodní zvuk vzduchového čerpadla. Tento typ zvuku je v pořádku a není závadou.
- 9.** Pomocí tlačítka **STOP (15)** můžete použití kdykoliv přerušit a znovu pokračovat.
- 10.** Pomocí tlačítka **EXIT (8)** se vrátíte do hlavní nabídky.
- 11.** Přístroj můžete vypnout pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 0 – vypnuto. Displej zhasne. Po skončení používání přístroje doporučujeme vyčkat 5 až 10 minut, aby měly ventilátory možnost elektroniku přístroje ochladit před vypnutím přístroje.

UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - VAKUOVÉ SÁNÍ

pohybová masáž

Aplikační hlavici se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí kontaktního gelu. **Nikdy nepoužívejte masáž přístrojem na sucho, ale v kombinaci s kontaktním sonogelem.** Při pohybové masáži je důležité nastavit **sílu nasávání na co nejmenší úroveň.** Zároveň nastavit co **nejdelší interval uvolnění vakua.** Pokud přístroj nasaje část těla až příliš silně, aplikátorem už nebude možné pohnout.




bodová masáž

Bodová masáž spočívá v aplikaci na konkrétní tělesné partie po částech – viz. obrázek. Přístroj zapněte a přiložte aplikátor k pleti. Po nastavení všech parametrů spustí přístroj funkci nasávání v síle a délce, kterou si sami zvolíte. Při bodové masáži může po aplikaci pleť zarudnout. Pokud si nastavíte nasávání příliš silné, mohou se na pleti objevit i mírné otoky až modřiny, které však v průběhu několika dní zcela zmizí. Vždy začínejte na nižší síle působení vakua a postupně si přidávejte dle vašeho pocitu. **Rozhodně hned nezačínajte na nejvyšších hodnotách!**



Při použití na ostatních částí těla postupujte podle následující grafické vizualizace. Rozdíl mezi pohybovou a bodovou masáží spočívá nejen v odlišné technice, ale v účinku působení na tělo. **Pohybová masáž** přispívá zejména ke zlepšení činnosti lymfy. Tělo získá lepší odvádět nadbytečnou vodu z končetin. Při **bodové masáži** podpoříte lokální krevní oběh, což přispívá k celkové efektivnější látkové výměně a odvodu škodlivin. Ideální na použití partií s výskytem příznaků celulitidy (pomarančové kůže).

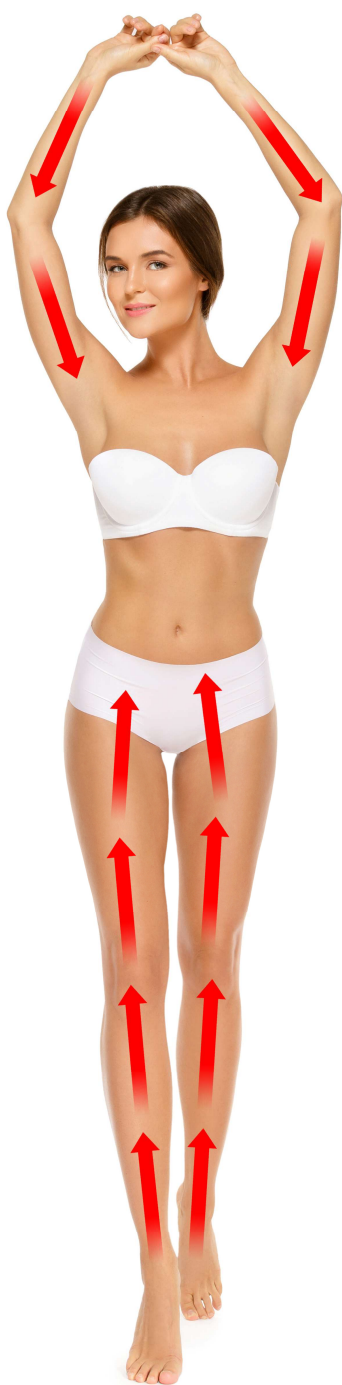

pohybová masáž



bodová masáž

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - VAKUOVÉ SÁNÍ

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka




DŮLEŽITÝ TIP K POUŽÍVÁNÍ VAKUOVÉ HLAVICE

Před použitím vakuové hlavice doporučujeme na pleť aplikovat masážní olejíček libovolné značky. Nezáleží na značce, ale olejové konzistenci. Aplikační hlavice bude po těle lépe klouzat. Olejíček navíc tak rychle nevysychá ve srovnání se sonogelem. V tomto případě nedoporučujeme aktivovat funkci radiofrekvence na vakuové hlavici. Olejová konzistence a příprava si s radiofrekvencí příliš „nerozumí“. Pro masáž těla radiofrekvencí použijte aplikační hlavici se 4 kolíčky. Pokud si přesto přejete používat vakuovou hlavici s radiofrekvencí, kterou přenáší dvě kontaktní plochy, aplikujte na pleť sonogel.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE


RADIOFREKVENCE 3 KOLÍČKY

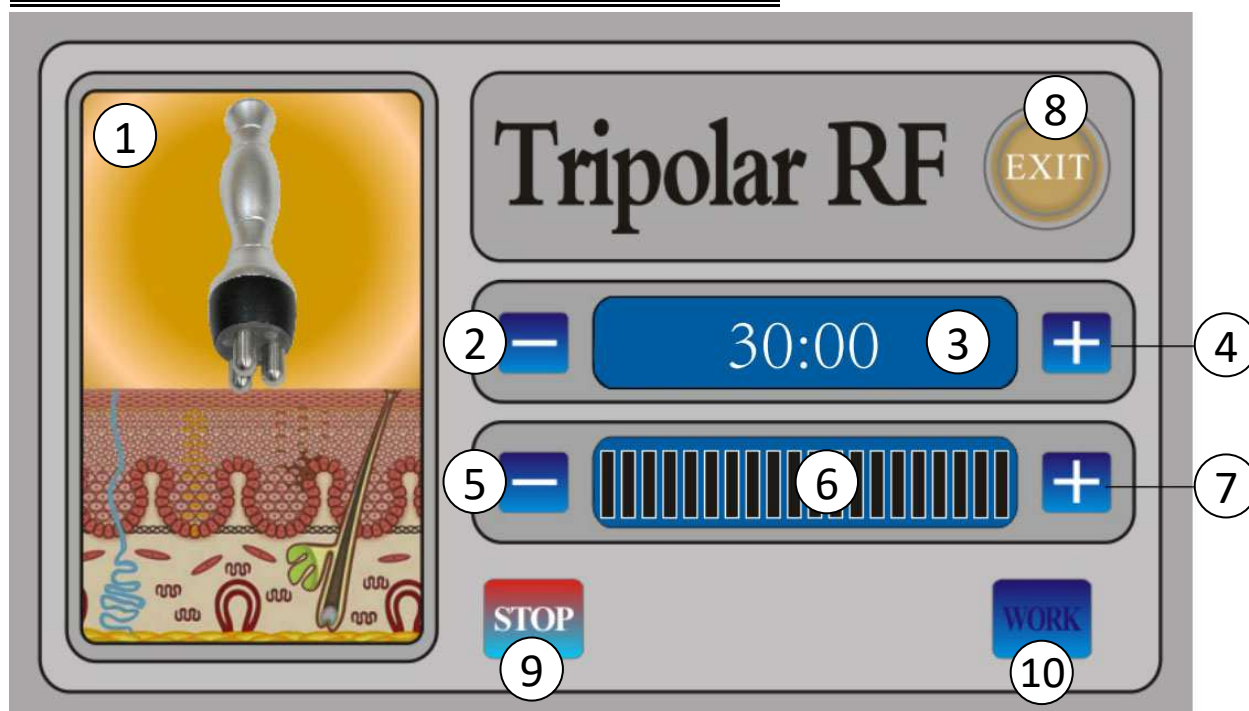

1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 1 – zapnuto. Na displeji se zobrazí hlavní nabídka. Pro využití radiofrekvence zvolte z nabídky položku **Tripolar RF**.
2. Pomocí tlačítek (2) a (4) zvolte čas aplikace dle vašeho požadavku. Zbývajícím čas (3).
3. Pomocí tlačítek (5) a (7) zvolte intenzitu působení radiofrekvence. Aktuálně nastavenou hodnotu můžete vidět na ukazateli (6).
4. Pomocí tlačítka **WORK** (10) zahájíte aplikaci pomocí radiofrekvence. Aplikační hlavice nyní generuje radiofrekvenční vlny. Průběh aplikace zobrazuje animace na levé straně displeje (1).
5. Pomocí tlačítka **STOP** (9) můžete aplikaci kdykoliv přerušit a znovu pokračovat pomocí tlačítka **WORK** (10).
6. Pomocí tlačítka **EXIT** (8) se vrátíte do hlavní nabídky.
7. Přístroj můžete vypnout pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 0 – vypnuto. Tlačítko zhasne. Displej zhasne. Po skončení používání přístroje doporučujeme vyčkat 5 až 10 minut, aby měly ventilátory možnost elektroniku přístroje ochladit před vypnutím přístroje.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

RADIOFREKVENCE 6 KOLÍČKŮ

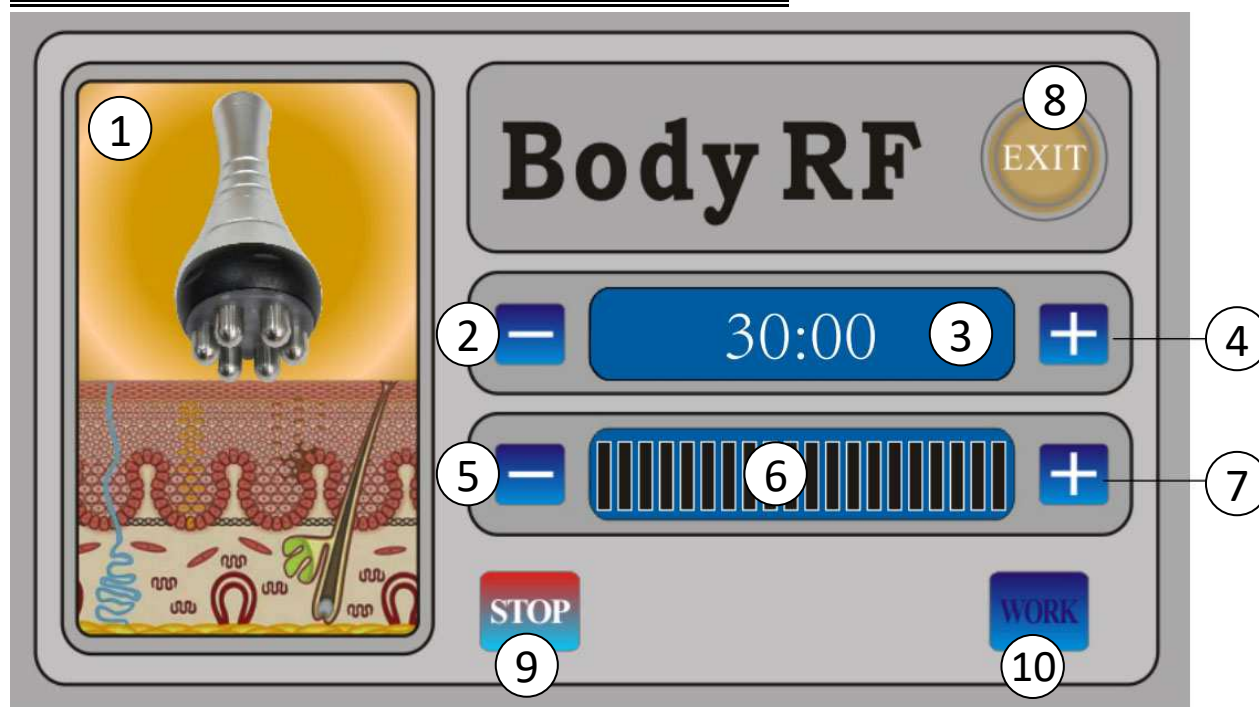

1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 1 – zapnuto. Na displeji se zobrazí hlavní nabídka. Pro využití radiofrekvence zvolte z nabídky položku **Body RF**.
2. Pomocí tlačítek (2) a (4) zvolte čas aplikace dle vašeho požadavku. Zbývajíc čas (3).
3. Pomocí tlačítek (5) a (7) zvolte intenzitu působení radiofrekvence. Aktuálně nastavenou hodnotu můžete vidět na ukazateli (6).
4. Pomocí tlačítka **WORK** (10) zahájíte aplikaci pomocí radiofrekvence. Aplikační hlavice nyní generuje radiofrekvenční vlny. Průběh aplikace zobrazuje animace na levé straně displeje (1).
5. Pomocí tlačítka **STOP** (9) můžete aplikaci kdykoliv přerušit a znovu pokračovat pomocí tlačítka **WORK** (10).
6. Pomocí tlačítka **EXIT** (8) se vrátíte do hlavní nabídky.
7. Přístroj můžete vypnout pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 0 – vypnuto. Tlačítko zhasne. Displej zhasne. Po skončení používání přístroje doporučujeme vyčkat 5 až 10 minut, aby měly ventilátory možnost elektroniku přístroje ochladit před vypnutím přístroje.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

RADIOFREKVENCE 4 KOLÍČKY



1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 1 – zapnuto. Na displeji se zobrazí hlavní nabídka. Pro využití radiofrekvence zvolte z nabídky položku **Face RF**.
2. Pomocí tlačítek (2) a (4) zvolte čas aplikace dle vašeho požadavku. Zbývajíc čas (3).
3. Pomocí tlačítek (5) a (7) zvolte intenzitu působení radiofrekvence. Aktuálně nastavenou hodnotu můžete vidět na ukazateli (6).
4. Pomocí tlačítka **WORK** (10) zahájíte aplikaci pomocí radiofrekvence. Aplikační hlavice nyní generuje radiofrekvenční vlny. Průběh aplikace zobrazuje animace na levé straně displeje (1).
5. Pomocí tlačítka **STOP** (9) můžete aplikaci kdykoliv přerušit a znovu pokračovat pomocí tlačítka **WORK** (10).
6. Pomocí tlačítka **EXIT** (8) se vrátíte do hlavní nabídky.
7. Přístroj můžete vypnout pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 0 – vypnuto. Tlačítko zhasne. Displej zhasne. Po skončení používání přístroje doporučujeme vyčkat 5 až 10 minut, aby měly ventilátory možnost elektroniku přístroje ochladit před vypnutím přístroje.

ČAS APLIKACE - RADIOFREKVENCE

Délku aplikace na pleti nelze stanovit s absolutní přesností podle pevně daných tabulek nebo jednotných časových údajů. Optimální délka stimulace pleti pomocí radiofrekvenčních vln se může lišit v závislosti na řadě individuálních faktorů, mezi které patří zejména aktuální stav pleti, věk uživatele, typ a citlivost pleti, stejně jako dlouhodobý způsob péče o pleť. V obecné rovině platí, že při úplně prvním použití by měla být aplikace krátká, zpravidla v řádu jednotek minut. Úvodní použití slouží především k tomu, aby uživatel mohl sledovat, jakým způsobem pleť na působení radiofrekvenčních vln reaguje, a jak rychle se po aplikaci vrací do běžného stavu, například z hlediska citlivosti na dotyk nebo přechodného zarudnutí. Na základě této individuální reakce lze následně orientačně upravit délku aplikace i časový rozestup mezi jednotlivými procedurami. Délka aplikace by měla vždy zohledňovat také velikost aplikované plochy. Aplikování celé plochy obličeje je časově náročnější než cílená aplikace na menší oblasti, například koutky úst nebo jemné vrásky v okolí očí.

Pokud vycházíme z běžné uživatelské praxe a orientačních zkušeností, stejnou oblast pleti je možné znovu aplikovat pomocí radiofrekvence zpravidla po uplynutí přibližně 7 až 10 dnů, vždy s ohledem na individuální reakci pleti a dodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhněte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

CO JE NORMÁLNÍ PO APLIKACI

- zarudnutí (obvykle ustoupí do 1–24 hodin),
- pocit tepla nebo „horké pleti“,
- mírný otok,
- jemná citlivost.

JAK POKOŽKU CO NEJLÉPE ZKLIDNIT**1) Chladit, ale ne ledem přímo**

- Použijte **chladivý gelový sáček** nebo **studený obklad** zabalený v látce
- Chladte přibližně 5 až 10 minut v intervalech
- Nepřikládejte led přímo na kůži – může to způsobit podráždění či poškození

2) Nanést zklidňující přípravky

Vhodné jsou:

- **aloe vera gel** (čistý, bez parfemace),
- **panthenol** (např. ve formě pěny nebo krému),
- **termální voda ve spreji**,
- produkty s **niacinamidem** (snižuje zarudnutí),
- lehké **hydratační krémy bez alkoholu a parfemace**.

Vyhňte se:

- aktivním látkám jako **retinol, AHA/BHA kyseliny, vitamín C**,
- parfémovaným nebo mastným krémům.

3) Vyhnout se teplu 24–48 hodin

To znamená:

- sauna
- solárium
- horké sprchy
- intenzivní sportování (zvýšení teploty a pocení prodlouží zarudnutí)
- přímé slunce

4) Neškrábat a nedráždit pokožku

- Nemačkejte, nedrhňte, nepoužívejte peelingy.
- Pleť ponechejte v klidu.


5) Použít SPF

- Pokud jdete ven, naneste **SPF 30–50**, i když je zataženo.
- Pleť je po radiofrekvenci citlivější na UV záření.

JAK DLOUHO MŮŽE POCIT TEPLA TRVAT?

- Běžné reakce odezní během **několika hodin až jednoho dne**.
- Citlivé pleti to může být **až 48 hodin**.

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

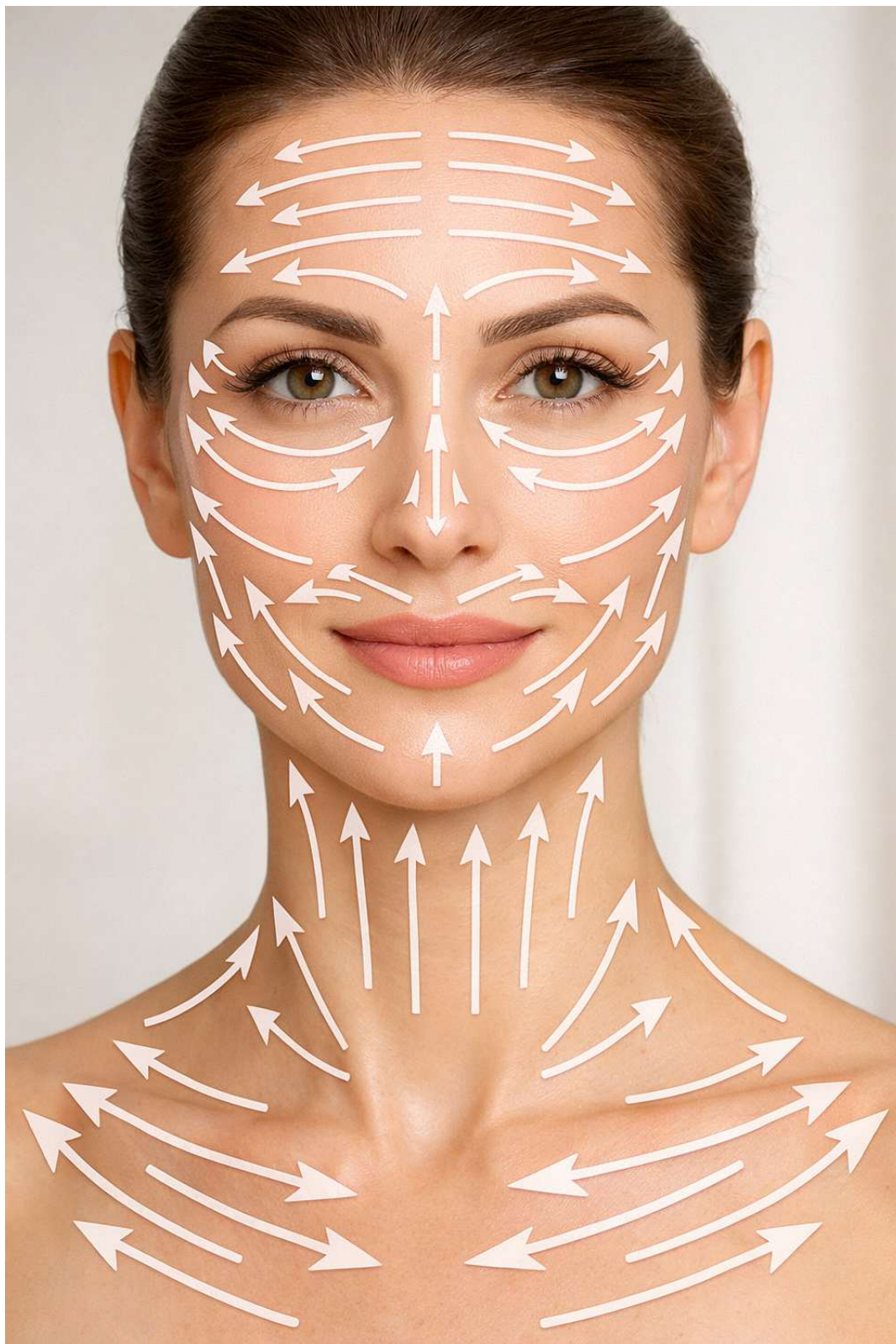

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

1. Čelo

- Pohybuj hlavici **od středu čela směrem do stran k vlasové linii**
- Pohyby jsou **vodorovné, plynulé a lehce tažené ven**
- Postupuj po čele **odspodu nahoru**, aby byla pokryta celá plocha

2. Oblast mezi obočím (kořen nosu)

- Ved' hlavici **od kořene nosu směrem vzhůru ke středu čela**
- Pohyb je **rovný, jemný a tažený nahoru**

3. Nos

- Začni u kořene nosu
- Pohybuj se **směrem dolů po hřbetu nosu**
- Po stranách nosu ved' pohyby **lehce šikmo ven směrem k tvářím**

4. Oční okolí (mimo oční víčka)

- Pohyby ved' **po kostním okraji očnice**, nikdy ne přímo na víčko
- Začni u vnitřního koutku oka
- Pokračuj **obloukovým pohybem směrem ven a lehce nahoru k spánkům**
- Pohyb je **velmi jemný, pomalý a plynulý**

5. Tváře

- Začni u nosu
- Pohybuj hlavici **směrem ven k uším a lehce nahoru**
- Pohyby mohou být:
 - obloukové
 - nebo krátké tahy směrem vzhůru
- Cílem je **podpora liftingového efektu**

6. Oblast nad horním rtem

- Neaplikuj přímo na rty
- Pohybuj hlavici **od středu nad horním rtem směrem šikmo nahoru k nosním křídlům**
- Pohyb je **jemný a krátký**

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

7. Okolí úst

- Začni u koutků úst
- Veď pohyb **směrem ven a lehce nahoru**
- Vyhni se přímému kontaktu se rty
- Pohyby jsou **obloukové, zjemňující mimické linie**

8. Brada a oblast pod bradou

- Na bradě veď pohyby **od středu brady do stran**
- Pod bradou pohybuj hlavicí **směrem vzhůru k čelisti**
- Pohyby jsou **tažené nahoru**, podporující zpevnění kontur

9. Krk

- Pohyby veď **od spodní části krku směrem vzhůru k bradě**
- Na stranách krku můžeš vést pohyb **šikmo nahoru**
- Vyhni se silnému tlaku v oblasti štítné žlázy

10. Dekolt


- Začni u středu dekoltu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k ramenům**
- Pohyby jsou **široké, plynulé a jemně tažené**

Obecná doporučení

- Pohyby jsou vždy **plynulé, pomalé a kontrolované**
- Netlač, nech hlavicí klouzat po pleti


Vždy se snaž pohybovat **směrem nahoru nebo ven**, nikoli dolů

MAPA CITLIVOSTI PLETI

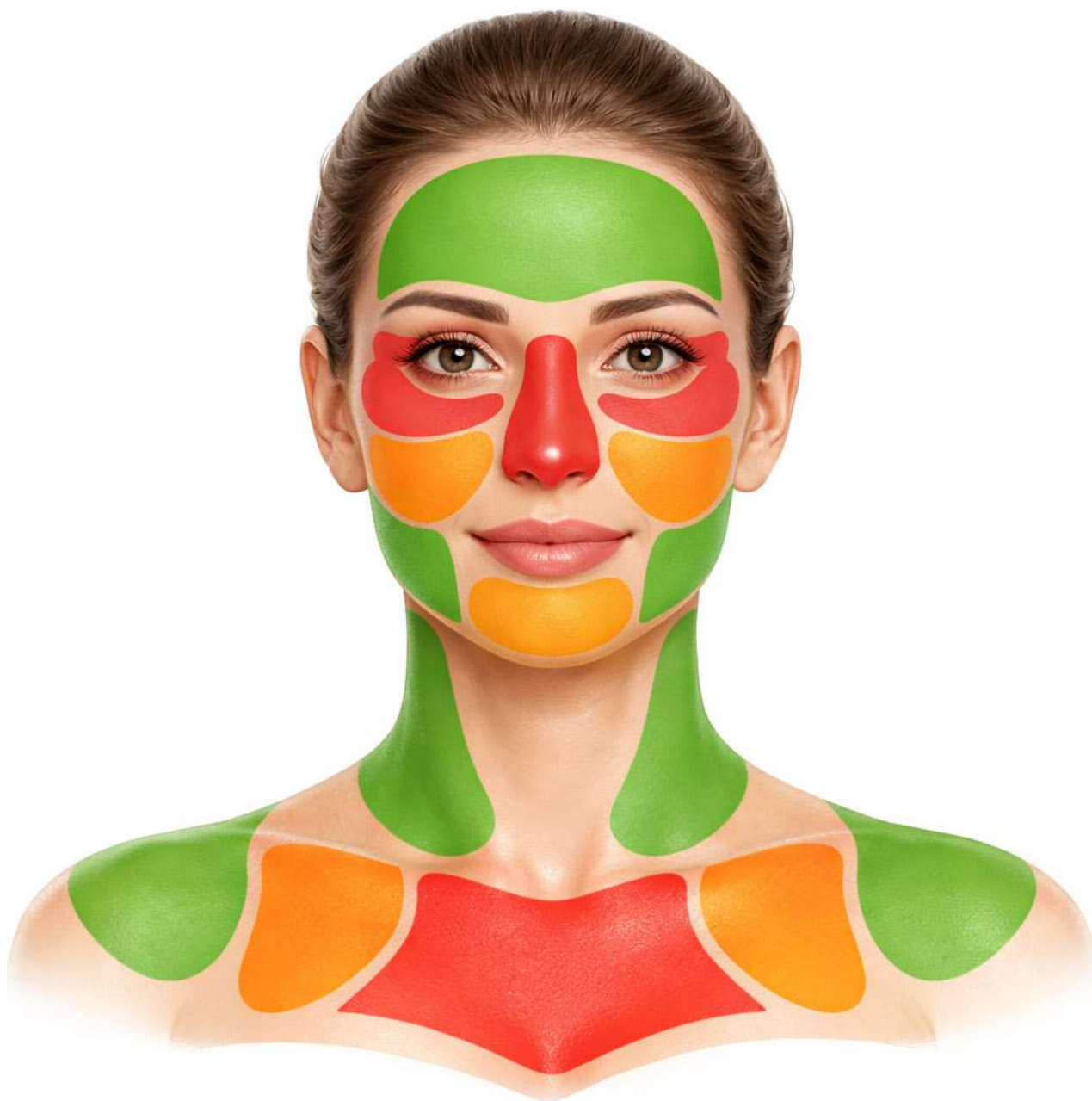

- **NÍZKÁ CITLIVOST**
- **STŘEDNÍ CITLIVOST**
- **VYSOKÁ CITLIVOST**

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ČERVENÉ SVĚTLO

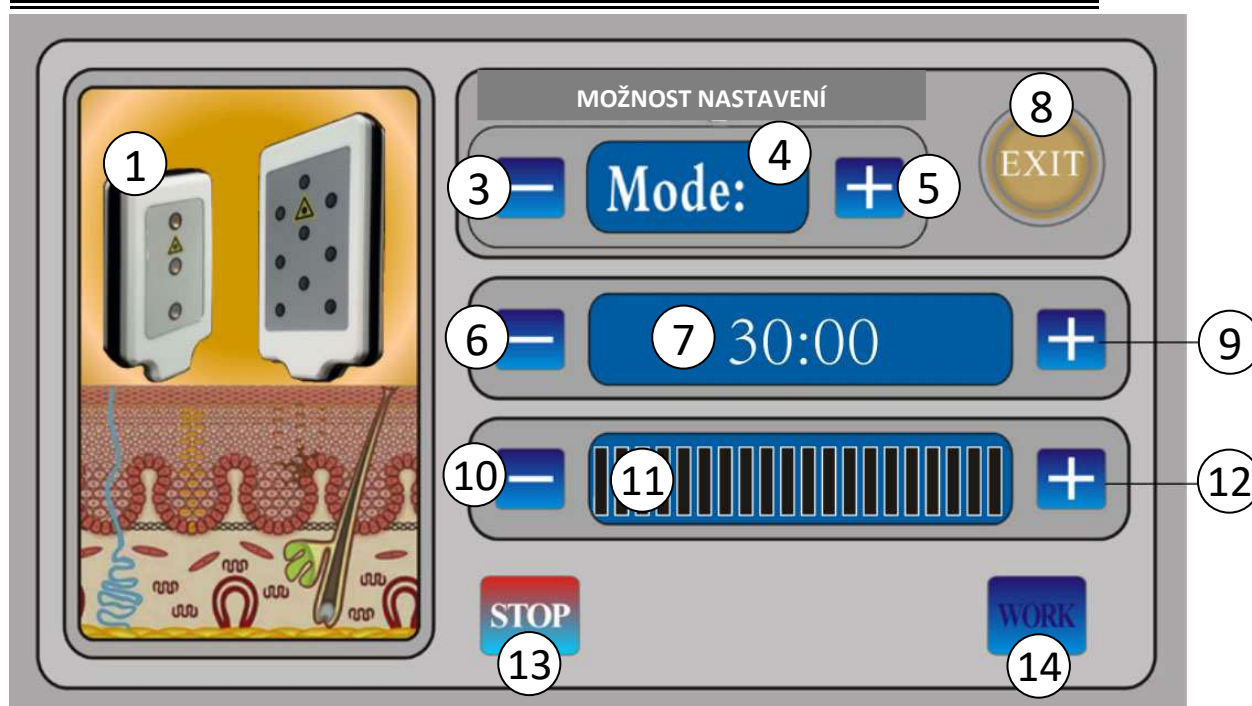


1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 1 – zapnuto. Na displeji se zobrazí hlavní nabídka.
2. Pomocí tlačítek (3) a (5) si můžete nastavit mód působení červeného světla. Nastavení **MODE** ovlivňuje režim působení červeného světla. Zda aplikační hlavice svítí kontinuálně nebo přerušovaně v různých rychlostech blikání. Pro používání je primárně určen program se stálým = kontinuálním působením červeného světla. Nastavený mód je zobrazen na ukazateli (4).
3. Pomocí tlačítek (6) a (9) zvolte čas aplikace dle vašeho požadavku. Zbývající čas (7).
4. Pomocí tlačítek (10) a (12) zvolte intenzitu působení červeného světla. Rozsah nastavení je od hodnoty 1 až 10. Vždy začínejte od hodnoty 1 a přidávejte pomalu dle pocitu tepla, které vnímáte na aplikované části těla. Intenzita působení červeného světla (11).
5. Pomocí tlačítka **WORK** (14) zahájíte aplikaci pomocí červeného světla. Aplikační hlavice nyní generují červené světlo. Průběh aplikace zobrazuje animace na levé straně displeje (1). Pokud nevyužijete všechny aplikační hlavice s červeným světlem, hlavice, které nepotřebujete, odpojte.
6. Pomocí tlačítka **STOP** (13) můžete aplikaci kdykoliv přerušit a znovu pokračovat pomocí tlačítka **WORK** (14).


7. Pomocí tlačítka **EXIT (8)** se vrátíte do hlavní nabídky.

PŘÍKLADY POUŽITÍ SVĚTELNÝCH APLIKÁTORŮ

Příklady aplikace hlavic s červeným světlem. Mají informativní charakter. Hlavní význam je znázornění různých možností použití. Slouží pro vaši inspiraci. Vy si samozřejmě můžete upevnit hlavice na vybrané partii těla podle svého.




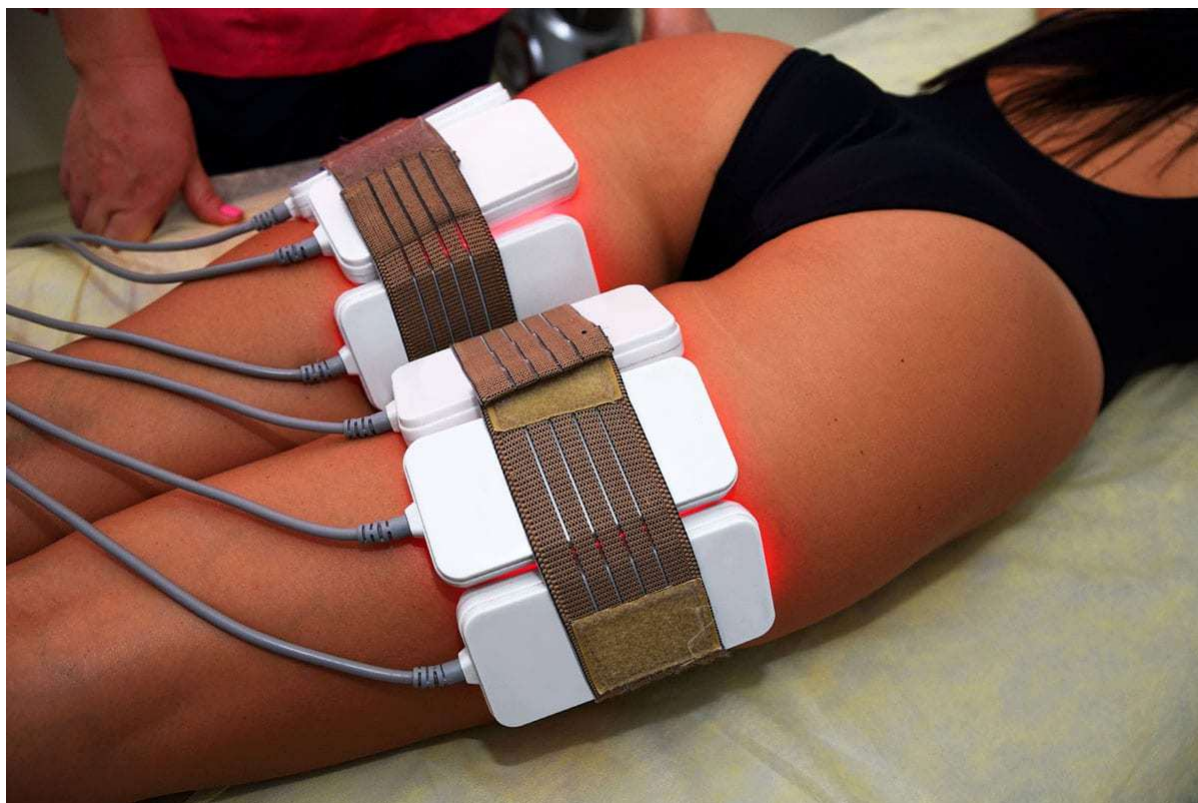

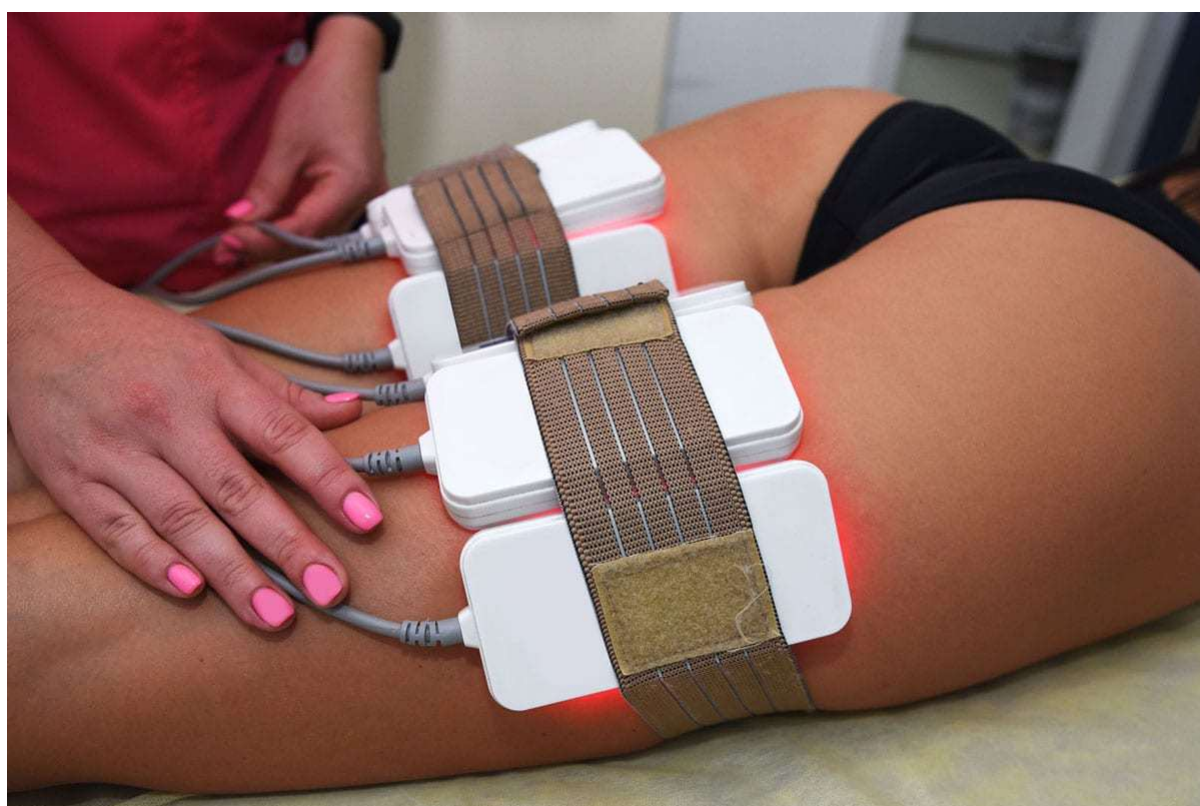



každá z aplikačních hlavic musí být v plném kontaktu s pletí

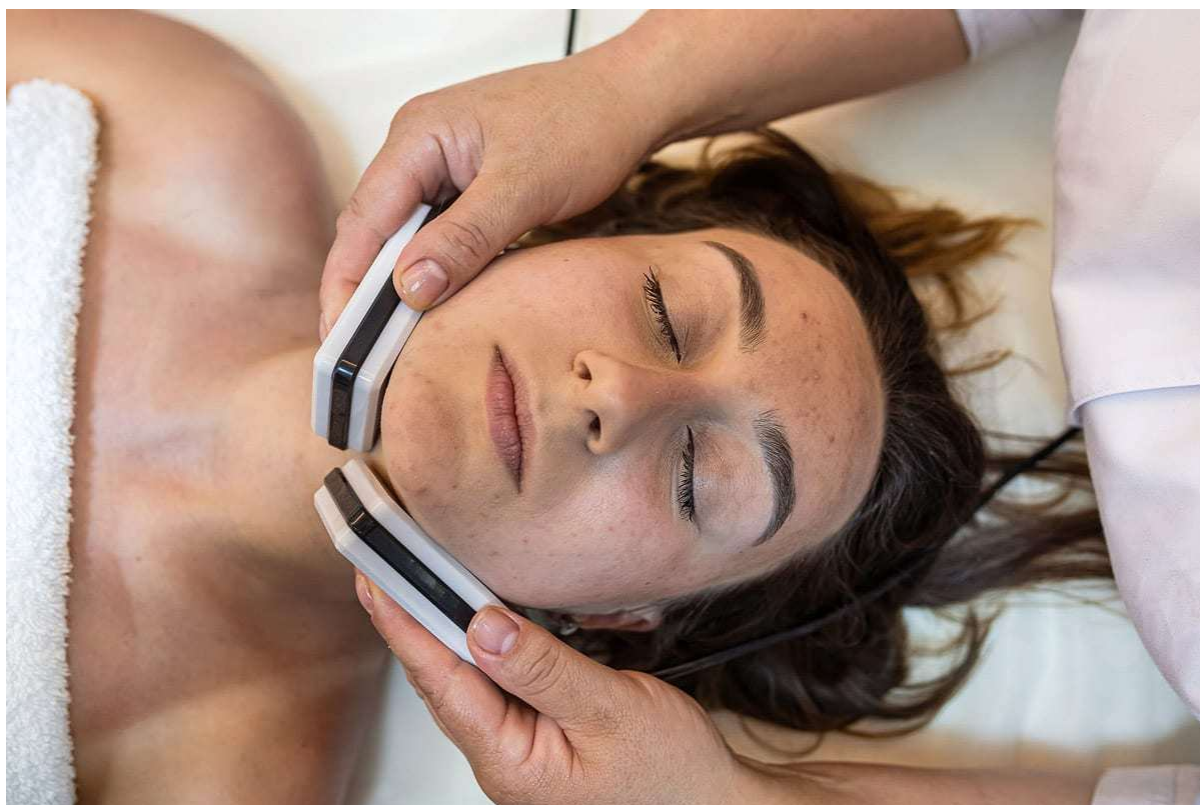

klient by měl mít následně aplikované ochranné brýle v průběhu působení červeného světla

DÉLKA A FREKVENCE POUŽITÍ HLAVIC

Použití červeného světla s vlnovou délkou 650 nm je určeno pro povrchovou, neinvazivní estetickou aplikaci. Mezi jednotlivými použitími se doporučuje ponechat časový odstup, aby bylo zajištěno komfortní a bezpečné používání přístroje.

- V průběhu jednoho dne je doporučeno zaměřit se vždy pouze na jednu vybranou partii těla.
- U větších oblastí lze aplikaci rozdělit do více sousedních úseků v rámci jedné partie.
- Celková doba použití na jednu partii by neměla v jednom dni překročit 30 až 40 minut.
- Opakované použití na stejné partii se doporučuje nejdříve po několika dnech, v souladu s doporučeným režimem používání.
- Použití lze zařadit do pravidelného režimu estetické péče dle individuálních preferencí uživatele.

Základní zásady použití:

1. Doba aplikace v jednom dni by neměla přesáhnout doporučený časový limit.
2. Mezi aplikacemi na stejnou oblast je vhodné dodržovat časový odstup.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ČERVENÉHO SVĚTLA

- 1.** Aplikačními hlavicemi nesvítit do místnosti. Funkci aktivovat v okamžiku, kdy jsou hlavice na pleti.
- 2.** Po ukončení aplikace může být pokožka v místě použití dočasně zarudlá. Tento jev je běžný a obvykle během krátké doby odezní.
- 3.** Aplikace červeného světla je navržena jako jednoduchá, povrchová a neinvazivní součást estetické péče.
- 4.** Dodržujte bezpečnostní pokyny týkající se ochrany zraku. Světelný zdroj nikdy neaktivujte mimo kontakt aplikačních hlavic s pokožkou a vyvarujte se přímého pohledu do světla.
- 5.** Pro první použití se doporučuje zvolit jednu vybranou oblast a řídit se doporučenou délkou a frekvencí aplikace uvedenou v návodu.
- 6.** Výsledky použití se mohou lišit v závislosti na individuálních faktorech a způsobu používání přístroje.
- 7.** Použití přístroje je určeno jako součást běžné estetické péče a nevyžaduje zvláštní režim před ani po aplikaci.
- 8.** Delší nebo častější používání, než je uvedeno v návodu, nezvyšuje účinnost aplikace a nedoporučuje se.
- 9.** Po použití může uživatel pociťovat dočasnou únavu nebo změny v komfortu, které jsou individuální a obvykle přechodné.

DOPORUČENÁ METODA POUŽITÍ HLAVIC



Při používání aplikační hlavice na vybraných částech těla se doporučuje přizpůsobit délku kontaktu s pokožkou a nastavení intenzity individuálním preferencím a zvolenému režimu použití. Pohyb aplikační hlavice lze upravit podle konkrétní oblasti a komfortu uživatele.


plynulý pohyb

Aplikační hlavici se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí sonogelu. **Nikdy nepoužívejte stimulaci pleti aplikační hlavici „na sucho“.** Při stimulaci pleti plynulým pohybem je celkově zkrácen čas kontaktu aplikačních kolíčků s konkrétním místem. **Při konstantním nastavení úrovně intenzity radiofrekvence můžete při rychlejším pohybu vnímat menší míru působení radiofrekvence ve srovnání s pomalejším pohybem.**

**razítkování**

Při aplikaci vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu pár sekund (tzv. razítkováním). Intenzitu přidávejte vždy podle pocitau.



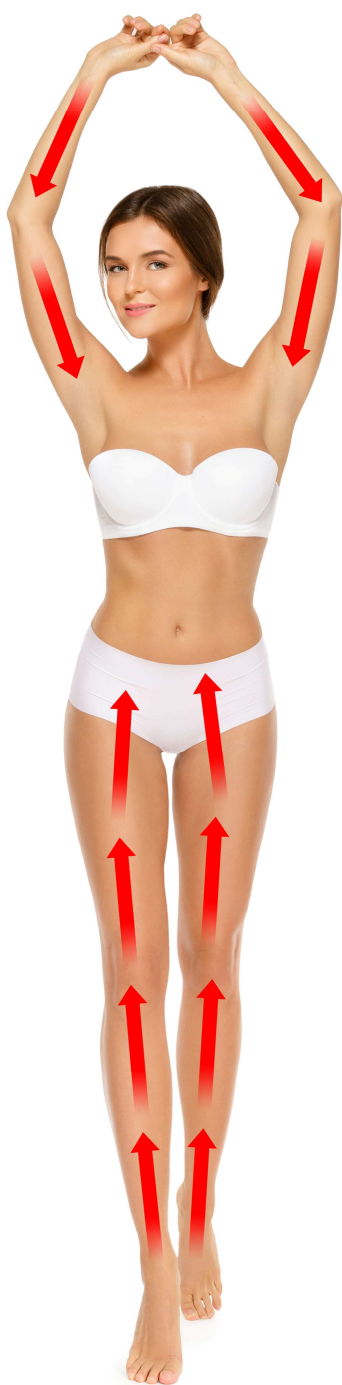

plynulý pohyb



razítkování

BEAUTYRELAX VIDEO NA YOUTUBE



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Kombinace ultrazvuku a radiofrekvence

V tomto návodu k obsluze jsou pro ultrazvuk a radiofrekvenci uvedeny doporučené časy aplikace a intervaly použití. Tyto hodnoty je třeba chápat jako obecná doporučení vycházející z charakteru jednotlivých technologií a běžné praxe při jejich používání. Současné použití ultrazvuku a radiofrekvence se **nevylučuje**, pokud jsou dodrženy doporučené časy aplikace a intervaly mezi jednotlivými použitími. Každá technologie působí odlišným způsobem a vyžaduje respektování doporučených přestávek mezi aplikacemi. V praxi je možné sestavit individuální plán použití. V jeden den lze použít ultrazvuk (včetně vakuové hlavice) i radiofrekvenci. Při opakovaném použití stejné technologie je však vždy nutné dodržet doporučený časový odstup uvedený v návodu k obsluze.

Vysoká nadváha a použití přístroje

Pokud trpíte výraznou nadváhou nebo obezitou, použití přístroje **nelze považovat za vhodné řešení tohoto stavu**. Estetický přístroj není určen k léčbě obezity ani k nahrazení změny životního stylu. V případě vysoké nadváhy doporučujeme konzultovat další postup s praktickým lékařem nebo kvalifikovaným odborníkem. Přístroj nelze používat jako náhradu odborné péče ani jako prostředek k řešení zdravotních obtíží.

Pro koho je přístroj BeautyRelax vhodný

Přístroj je určen pro osoby, které mají zájem o neinvazivní estetickou péči a chtějí podpořit vzhled vybraných partií těla nebo pleti. Je vhodný pro uživatele, kteří vnímají sníženou pružnost pokožky, nerovnosti povrchu kůže nebo známky únavy pleti. Použití přístroje je určeno jako doplněk běžné péče o tělo a pleť. Výsledky jsou individuální a nelze je předem zaručit.

Doporučení před a po aplikaci ultrazvuku

Před aplikací ultrazvuku se doporučuje alespoň 4 hodiny nekonzumovat těžká nebo mastná jídla. Vhodná je lehká strava. Den před aplikací, v den aplikace a několik dní po ní se doporučuje dbát na dostatečný pitný režim (přibližně 2–2,5 litru tekutin denně). Doporučuje se upřednostnit neperlivou vodu. Po aplikaci je vhodné vyhnout se alkoholu, nadměrnému množství kofeinu, nikotinu a těžkým jídlům. Tyto faktory mohou obecně ovlivňovat subjektivní komfort uživatele. Doporučuje se také zařadit lehkou pohybovou aktivitu, například chůzi.

Pohybová aktivita při používání přístroje

Použití přístroje není nutné kombinovat s intenzivní fyzickou zátěží. Doporučena je lehká pohybová aktivita, ideálně v den aplikace (např. krátká procházka, lehké protažení nebo mírná aktivita v domácím prostředí). Cílem je podpora celkové pohody a komfortu uživatele. Extrémní fyzické výkony nejsou vyžadovány ani doporučovány.

Pořadí použití ultrazvukové a vakuové hlavice

Ultrazvukovou hlavici lze použít samostatně. Z hlediska doporučeného postupu je vhodné následně použít vakuovou hlavici, která slouží k mechanické masáži aplikované oblasti.

Doporučené pořadí použití:

1. ultrazvuková hlavice
2. vakuová hlavice

Vnímání aplikace a možné průvodní jevy

Aplikace je při dodržení všech pokynů uvedených v návodu považována za bezpečnou. V průběhu použití se mohou objevit běžné a dočasné vjemy, jako například:

- jemné brnění nebo mravenčení při ultrazvuku,
- pocit tepla při radiofrekvenci,
- přechodné zarudnutí pokožky nebo drobné otlaky při použití vakuové hlavice.

Tyto projevy jsou individuální a obvykle samovolně odezní.

Akustické projevy ultrazvuku

Během aplikace ultrazvuku může uživatel vnímat slabé pískání. Intenzita tohoto projevu se může lišit v závislosti na citlivosti sluchu. Jedná se o běžný průvodní jev ultrazvukové technologie. Pro zvýšení komfortu lze snížit intenzitu výkonu pomocí ovládacího panelu přístroje.

Kombinace jednotlivých technologií

Jednotlivé technologie lze kombinovat během jedné aplikace nebo je používat samostatně v různých dnech. Doporučené intervaly mezi aplikacemi stejné technologie je nutné vždy dodržet. Uvedené postupy slouží jako doporučení pro běžné použití a nejsou závazným léčebným protokolem.

Příklad aplikačního postupu (orientační)

Uživatel se může rozhodnout zaměřit například na oblast stehen:

- nanesení gelu a aplikace radiofrekvence (cca 5 minut na každou nohu),
- doplnění gelu a aplikace ultrazvuku (do 10 minut na každou nohu),
- setření gelu, nanesení oleje a použití vakuové hlavice (cca 5 minut na každou nohu).

Po aplikaci je vhodná lehká pohybová aktivita, například svižnější chůze.

Doporučené intervaly použití

- Ultrazvuk: doporučený interval mezi aplikacemi je 7–10 dní
- Radiofrekvence: doporučený interval mezi aplikacemi je 7–10 dní
- Vakuová hlavice: lze používat častěji, dle individuální tolerance

Očekávatelné výsledky

Výsledky použití přístroje jsou individuální a závisí na řadě faktorů, jako je pravidelnost používání, typ pokožky, životospráva a celkový životní styl. Přístroj nelze považovat za prostředek k léčbě ani za záruku konkrétního výsledku.

Bezpečnost a charakter přístroje

Přístroj není zdravotnickým prostředkem. Patří do kategorie masážních a estetických přístrojů. Neléčí žádná onemocnění a není určen k diagnostice ani terapii.

Hygiena a údržba aplikačních hlavic

Po každém použití je nutné aplikační hlavice očistit od zbytků gelu, dezinfikovat vhodným dezinfekčním prostředkem (ideálně na bázi alkoholu) a důkladně osušit. Dodržování hygienických zásad minimalizuje riziko přenosu mikroorganismů a prodlužuje životnost přístroje.

Používání více osobami

Přístroj může používat více osob pouze za předpokladu důsledné dezinfekce aplikačních hlavic po každém použití. U hlavic s červeným světlem se dezinfekční prostředek aplikuje nejprve na hadřík, nikoliv přímo na hlavici.

Stav pleti před a po radiofrekvenci

Před použitím radiofrekvence by měla být pleť čistá, zbavená make-upu a povrchových nečistot. Doporučuje se vyhnout procedurám, které mohou pleť mechanicky podráždit. Po aplikaci je vhodné pleť hydratovat běžným hydratačním krémem a v den aplikace se vyhnout dalším kosmetickým zákrokům.

Certifikace, záruka a další informace

Přístroj splňuje platné evropské normy pro tento typ zařízení. Poskytujeme standardní záruční i pozáruční servis. Přístroj není vodotěsný a žádná jeho část není určena k mytí pod tekoucí vodou.

ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU

1. ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Odstranění sonogelu/nanášeného přípravku.
- Hlavici otřete měkkým, suchým ubrouskem (např. mikrovláknem) nebo vatičkou.
- Pokud je gel zaschlý, můžete použít vlhčený ubrousek bez alkoholu (určený pro elektroniku).

2. DEZINFEKCE (POKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ VÍCE OSOB)

Postup dezinfekce:

- Nastříkejte isopropylalkohol (70–80%) ve spreji na hadřík (NE přímo na hlavici!).
- Jemnými pohyby otřete povrch hlavice.
- Nechte zcela vyschnout (alkohol se rychle odpaří).

Pozor! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (aceton, čpavek, chlor).

3. OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

- Hlavici NENAMÁČEJTE – voda by mohla poškodit elektroniku.
- Po čištění vždy důkladně osušte suchým hadříkem.

4. DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA

- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, aplikujte na kovové části hlavice tenkou vrstvu antiseptického přípravku (např. lékařský alkohol), aby nedošlo k oxidaci.
- Skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

5. UPOZORNĚNÍ

- Neponořujte hlavici do vody ani čisticích roztoků!
- Nepoužívejte abrazivní materiály (kartáče, drátěnky)!
- Nepoužívejte horkou vodu nebo páru!

DOPORUČENÍ PRO PRODLUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

- Čistěte hlavici ihned po použití – zabráníte zasychání gelu.
- Při dezinfekci používejte pouze isopropylalkohol – nepoškozuje materiály.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození (praskliny, koroze).

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma **SANTADRIA s.r.o.**, IČO: 29195454, DIČ: CZ29195454, tímto informuje zákazníka, že výrobek je určen ke **masážním a relaxačním** v souladu s návodem k obsluze a **není zdravotnickým prostředkem** ani neslouží k diagnostice, prevenci nebo léčbě jakéhokoli onemocnění.

Prodávající odpovídá za vlastnosti výrobku v rozsahu stanoveném **platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky**, zejména za shodu výrobku s technickými a bezpečnostními požadavky v okamžiku jeho uvedení na trh.

Prodávající **nenese odpovědnost za škody nebo újmy**, které vzniknou v důsledku:

- používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bezpečnostními pokyny nebo určeným účelem použití,
- neodborného, nevhodného nebo nadměrného používání výrobku,
- používání výrobku osobami, u nichž je jeho použití podle návodu kontraindikováno,
- zásahů do výrobku, jeho úprav, oprav nebo manipulace provedených neoprávněnou osobou,
- používání výrobku v rozporu s platnými právními předpisy v zemi, kde je výrobek používán.

V případě **komerčního používání výrobku** bere zákazník na vědomí, že **odpovědnost za splnění veškerých požadavků vyplývajících z platné legislativy**, zejména v oblasti odborné způsobilosti obsluhy, licencí, povolení nebo jiných zákonných podmínek, **nese výhradně provozovatel** zařízení. Proávající nenese odpovědnost za právní důsledky vyplývající z komerčního používání výrobku v rozporu s právními předpisy platnými v konkrétní jurisdikci.

Tato doložka **neomezuje ani nevylučuje práva zákazníka**, která mu náleží podle závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele, ani odpovědnost prodávajícího za vady výrobku či škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu, v jakém ji nelze podle práva vyloučit.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz

beautyrelax

PO - PÁ 11:00 - 18:00
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Multifunkční přístroj BODYFACE SILHOUETTE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2912**

EAN 8594166121843

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2021 EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 6100-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A2:2015 EN 62233:2008

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt není zdravotnický prostředek.

Slouží pro sportovní rekondiční masáž za účelem uvolnění svalů na vybraných částech těla.


Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů - TARIC 90191010

Při komerčním použití je třeba klást důraz na hygienu provozu přístroje.

Teplota působení radiofrekvence 40°C. Přístroj nenarušuje integritu pleti. Nabízí neinvazivní aplikaci na pleti. Je určen pro příjemné prohřátí pleti teplem.

Přístroj může k podnikání pro komerční provoz využívat pouze osoba, která splňuje odbornou způsobilost ve smyslu aktuální platné legislativy.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.

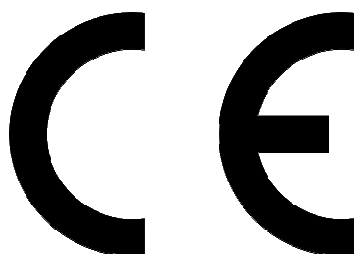

Místo vydání:
Datum vydání:

Brno
1.2.2023



.....
Martin Hrbek, jednatel