

# NÁVOD K OBSLUZE

Estetický multifunkční přístroj

**BeautyRelax BR-1960**

## BODYFACE ULTIMATE



## OBSAH:

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX             | 4  |
| SLOVO ÚVODEM                             | 5  |
| UPOZORNĚNÍ                               | 6  |
| POUŽITÍ SONOGELU                         | 6  |
| KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT         | 7  |
| ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ - ULTRAZVUK     | 7  |
| POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ - ULTRAZVUK     | 7  |
| LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK            | 8  |
| HLAVNÍ VÝHODY                            | 11 |
| VLASTNOSTI PŘÍSTROJE                     | 11 |
| 3 RŮZNÉ APLIKAČNÍ HLAVICE                | 11 |
| OBSAH BALENÍ                             | 11 |
| PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE        | 12 |
| ULTRAZVUKOVÉ VLNY                        | 13 |
| RADIOFREKVENCE                           | 14 |
| ČERVENÉ SVĚTLO                           | 14 |
| VAKUOVÉ NASÁVÁNÍ                         | 15 |
| RADIOFREKVENCE                           | 16 |
| ULTRAZVUK                                | 16 |
| POPIS PŘÍSTROJE                          | 17 |
| POPIS DISPLEJE - ULTRAZVUKOVÉ VLNY       | 23 |
| POPIS DISPLEJE - RADIOFREKVENCE          | 24 |
| POPIS DISPLEJE - VAKUOVÉ SÁNÍ            | 25 |
| INSTALACE PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE  | 26 |
| INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁK              | 27 |
| INSTALACE PŘÍSTROJE - FILTRAČNÍ TAMPÓNEK | 28 |
| INSTALACE PŘÍSTROJE - VÝMĚNA POJISTKY    | 29 |
| OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ULTRAZVUK           | 30 |
| NASTAVENÍ INTENZITY/FREKVENCE ULTRAZVUKU | 32 |
| ČAS OŠETŘENÍ                             | 33 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA                         | 33 |

## OBSAH:

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ - ULTRAZVUK                       | 34 |
| UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - ULTRAZVUK                    | 35 |
| OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - VAKUOVÉ SÁNÍ                          | 39 |
| UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - VAKUOVÉ SÁNÍ                 | 42 |
| POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ - VAKUOVÉ SÁNÍ                    | 44 |
| OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - RADIOFREKVENCE                        | 45 |
| DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE                   | 47 |
| METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU - RADIOFREKVENCE           | 49 |
| BEAUTYRELAX VIDEO NA YOUTUBE                               | 50 |
| NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI                              | 51 |
| ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU                                   | 57 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 58 |
| CERTIFIKACE                                                | 58 |
| EU DISTRIBUTOR                                             | 58 |
| ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ                                      | 59 |

# VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

## BeautyRelax – Špičková technologie krásy pro domácí i profesionální použití

Vítejte ve světě profesionální estetiky v pohodlí domova! BeautyRelax je ryze česká značka, která od roku 2010 přináší inovativní přístroje pro péči o pleť, tělo a vlasy. Naše zařízení kombinují nejmodernější technologie s jednoduchým ovládáním, takže si můžete dopřát salonní péči bez nutnosti návštěvy kosmetického studia.



## Proč si vybrat BeautyRelax?

**Vysoká účinnost** – Používáme stejné technologie jako profesionální salony (radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud).

**Univerzální použití** – Vhodné pro domácí i komerční využití.

**Odborné poradenství** – Pomůžeme vám vybrat ideální přístroj na míru vašim potřebám.

**Nadstandardní služby** – Rychlé doručení, záruční a pozáruční servis.

## Naše kategorie přístrojů

**Kosmetické přístroje** – Pro dokonalou pleť bez vrásek, akné nebo pigmentace.

**Přístroje na formování postavy** – Redukce celulitidy, lifting a modelace kontur.

**Masážní technologie** – Lymfatické masáže, relaxace a regenerace svalů.

**IPL depilace** – Trvalé odstranění chloupků šetrnou cestou.

## Salonní péče v domácích podmínkách

Díky pokrokům v estetických technologiích si nyní můžete dopřát stejně účinná aplikace jako v kosmetickém studiu – bez bolestivých zákroků a dlouhého čekání. Ať už řešíte:

- Vrásky, povadlou pleť nebo nedostatek elasticity
- Celulitidu, ochablé kontury nebo otoky
- Nechtěné chloupky nebo problematickou pokožku

S BeautyRelax dosáhnete viditelných výsledků šetrně, bezpečně a bez nepříjemných pocitů.

## Vize zakladatele

*„Od začátku naší cesty je naší prioritou zpřístupnit špičkové estetické technologie každému. Ať už hledáte přístroj pro osobní péči, nebo profesionální studio, nabízíme řešení s vysokou užitnou hodnotou, dlouhou životností a rychlou návratností investice.“*

**Martin Hrbek**, zakladatel a odborný konzultant BeautyRelax

## Ušetřete čas i peníze

Pravidelným používáním přístrojů BeautyRelax můžete výrazně snížit náklady na kosmetické procedury a zároveň mít svou péči plně pod kontrolou.

- Výsledky bez bolesti a zbytečného stresu
- Šetrná neinvazivní řešení pro všechny typy pleti
- Vybírejte z desítek modelů pro různé potřeby

Objevte kouzlo moderní estetiky a vyberte si svůj ideální přístroj v naší kompletní nabídce. Těšíme se, že s námi budete sdílet vášně pro krásu a inovace!



(+420) 737 196 160  
 mh@santadria.cz  
 shop.beautyrelax.cz  
 www.beautyrelax.cz  
 facebook.com/BeautyRelaxEquipment


prodej | servis | poradenství | konzultace | školení  
**MARTIN HRBEK** odborný konzultant a školitel  
 SANTADRIA s.r.o. Mojžírovo nám. 75/2 Brno 62100 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454



## **SLOVO ÚVODEM**

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Estetický přístroj pro neinvazivní ošetření vybraných částí těla pracuje s technologiemi, které jsou bezbolestné a bezpečné. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost splňuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených bezpečnostních norem. Aby bylo možné efektivně stimulovat pleť a podkožní tukovou tkáň, pracuje přístroj s určitým výkonem. Pokud nebudete postupovat dle uvedených pokynů, nebudete cítit upozornění a výčet kontraindikací, můžete si váš zdravotní stav v krajním případě negativně ovlivnit. Na druhou stranu nemějte z používání přístroje obavu. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny používání v domácích podmínkách bez dohledu erudované osoby z oblasti zdravotnictví.

### Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie masážních/estetických přístrojů. Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě obezity ani jiných souvisejících omezení. Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají v redukci podkožního tuku, potlačení projevů celulitidy a zvýšení pružnosti pleti.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní ošetření. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky neprotrhne kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Ošetření je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (sonogel). Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Ultrazvuk a radiofrekvence získá lepší schopnost navázat na pleť.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.

Tým BeautyRelax.cz

## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny. Po každém použití je třeba důkladně dezinfikovat aplikační hlavici.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj v průběhu používání žádným způsobem nezakrývejte.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



## POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny a radiofrekvence se tak mohou na pleť lépe navázat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.



## KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (v místě použití přístroje)
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



## ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ - ULTRAZVUK

- Hlava
- Krk (přední i zadní strana)
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



## POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ - ULTRAZVUK


- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Stehna
- Zadeček
- Lýtka



**Poznámka:** párová oblast těla je brána jako jedna partie


## LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **snažte vyhnout** těmto oblastem lymfatických uzlin. Letmý dotyk nevadí. Stálou stimulaci těchto uzlů nedoporučujeme. Uzly jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

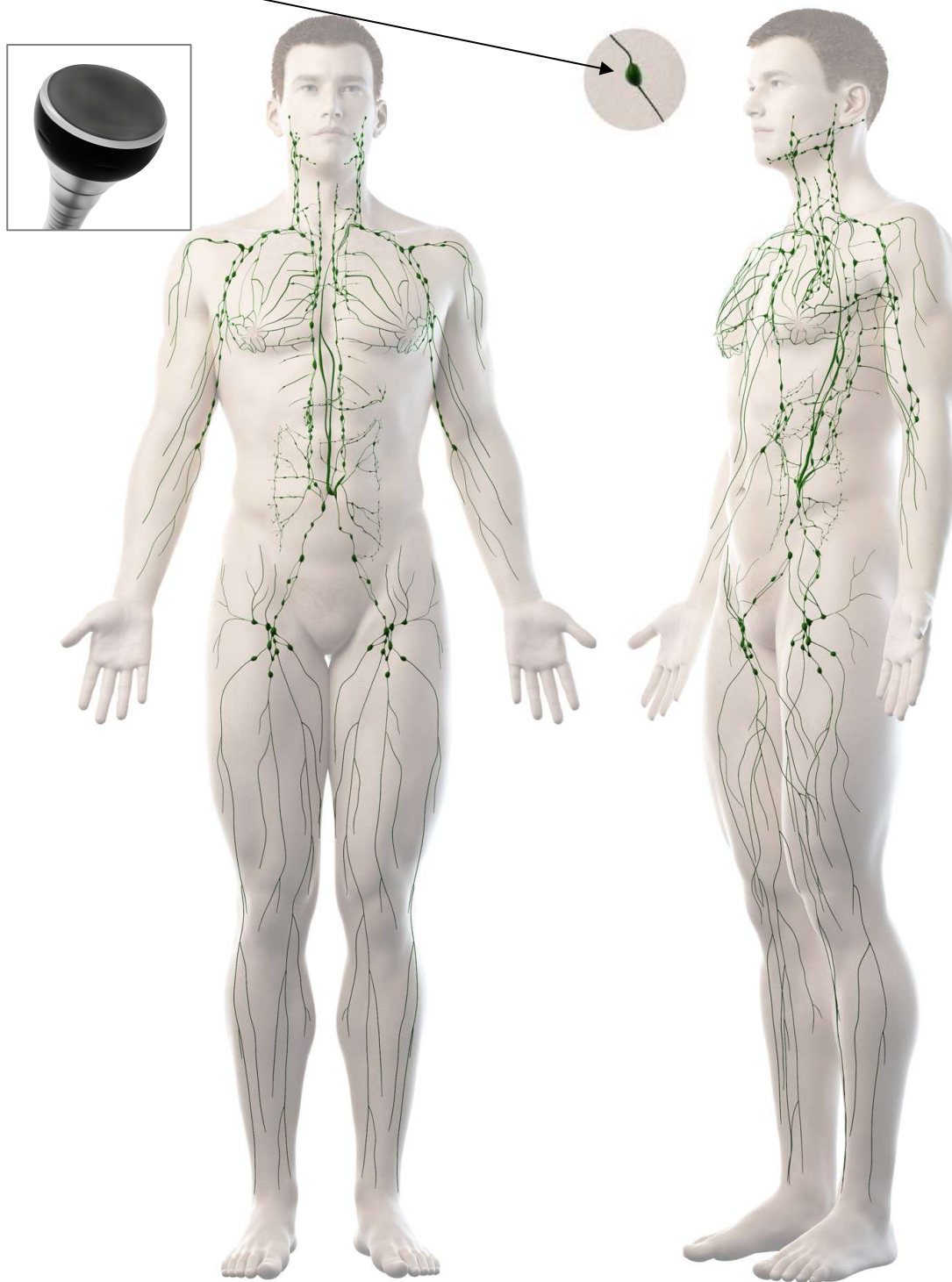

## LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **snažte vyhnout** těmto oblastem lymfatických uzlin. Letmý dotyk nevadí. Stálou stimulaci těchto uzlů nedoporučujeme. Uzly jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

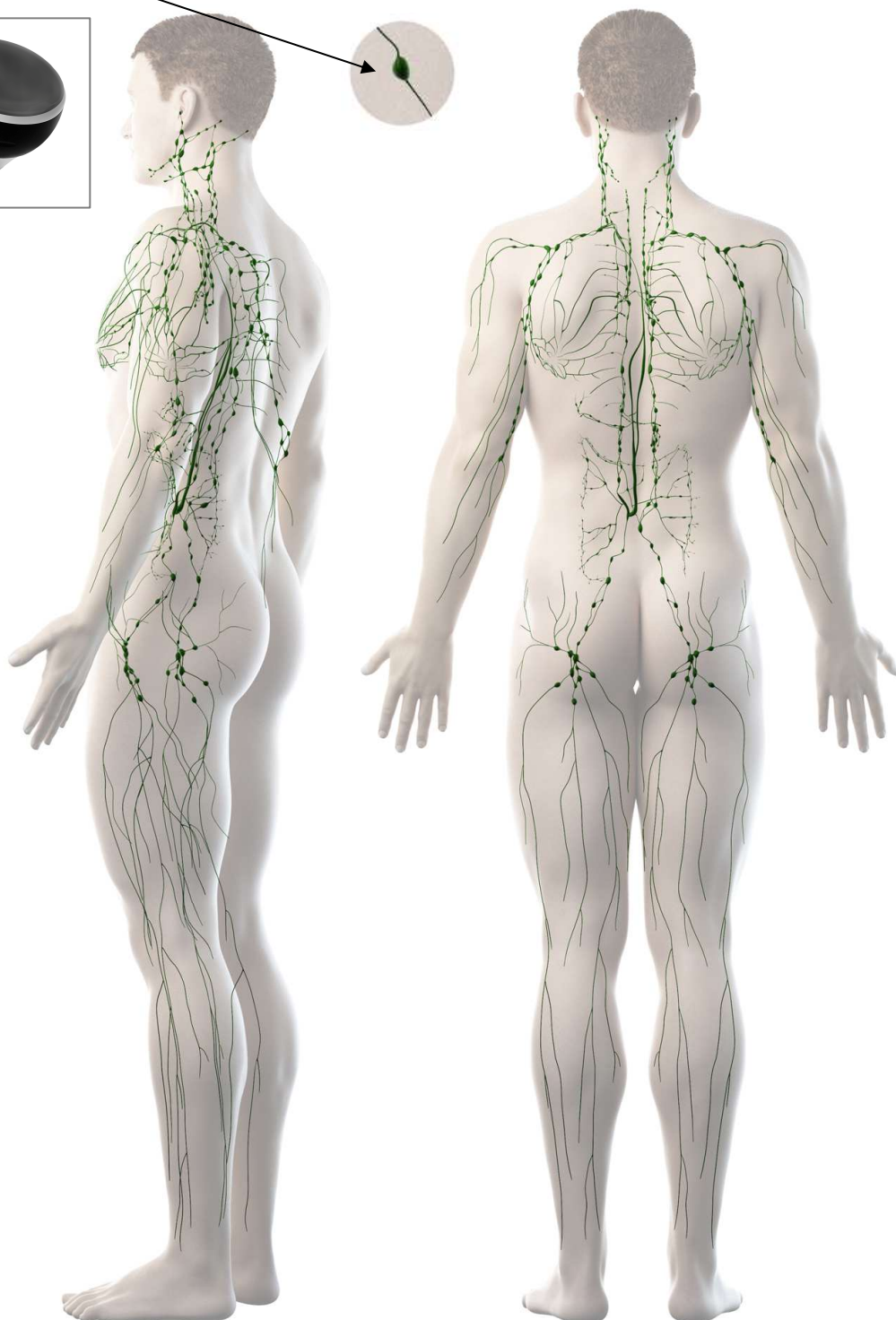

## LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **snažte vyhnout** těmto oblastem lymfatických uzlin. Letmý dotyk nevadí. Stálou stimulaci těchto uzlů nedoporučujeme. Uzly jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:





## **HLAVNÍ VÝHODY**

- Redukce jemných mimických vrásek
- Zvýšení pružnosti kontur obličeje
- Zpevnění a vypnutí pleti
- Remodelace kolagenních vláken
- Potlačení projevů celulitidy
- Potlačení strií a jemných jizviček
- Stimulace lymfatického systému končetin
- Redukce tukové tkáně na vybraných tělesných partiích
- Zcela neinvazivní charakter ošetření
- Bezpečné, bezbolestné používání
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Skutečně funkční lymfatická masáž pod tlakem

## **VLASTNOSTI PŘÍSTROJE**

- Stolní provedení
- Kvalitní zpracování všech komponentů
- Vysoká užitná hodnota
- Extrémně dlouhá životnost přístroje
- Možnost dávkování výkonu jednotlivých technologií
- Hlavní jednotka má ovládací panel a barevný displej
- Určeno pro domácí i komerční využití
- Frekvence ultrazvukových vln: **40KHz**
- Frekvence radiofrekvenčních vln: **5Mhz**

## **3 RŮZNÉ APLIKAČNÍ HLAVICE**

- Podtlaková lymfatická drenáž s vakuovým nasáváním a radiofrekvencí
- Multipolární radiofrekvence
- Ultrazvuková kavitace

## **OBSAH BALENÍ**

- Hlavní jednotka BeautyRelax BR-1960
- Aplikátor s vakuovým sáním a přidavnou funkcí radiofrekvence  
Rozsah podtlaku **0 až 250Kpa**, radiofrekvence - **5Mhz**
- Aplikátor s multipolární radiofrekvencí - frekvence **5Mhz**
- Aplikátor s ultrazvukovou kavitací - frekvence **40KHz**
- Balení sonogelu 250ml
- Sada filtračních tampónků pro vakuovou hlavici a sada náhradních pojistek
- Plastový držák
- Napájecí kabel 220V
- Návod k obsluze

## **PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE**

BeautyRelax Bodyface Ultimate je multifunkční zařízení pro ošetření celého těla. Přístroj využívá technologie nejčastěji používané v estetických studiích. Podtlaková lymfatická drenáž s vakuovým nasáváním, multipolární radiofrekvence, ultrazvuková kavitace. Neinvazivní lifting pleti, podtlaková drenáž pro potlačení příznaku celulitidy a ultrazvuková kavitace pro formování postavy. Kvalitní zpracování všech komponentů. Vysoká užitná hodnota. Extrémně dlouhá životnost přístroje. Možnost dávkování výkonu jednotlivých technologií. Stolní provedení.






## ULTRAZVUKOVÉ VLNY

Přístroj na domácí kavitaci generuje prostřednictvím velké aplikační hlavice ultrazvukové vlny, které pronikají do podkoží. Tkáň následně absorbuje tuto ultrazvukovou energii. Dochází k narušení integrity tukové buňky a uvolňuje se tuk. Uvolněný tuk se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Odstraněný tuk se zpět do tkáně nevrací. Ultrazvuková kavitace je bezbolestná, neinvazivní, šetrná, účinná a hlavně trvalá metoda pro odstranění tukové tkáně, redukci celulitidy a vyhlazení pokožky.



frekvence ultrazvukových vln

# 40KHz

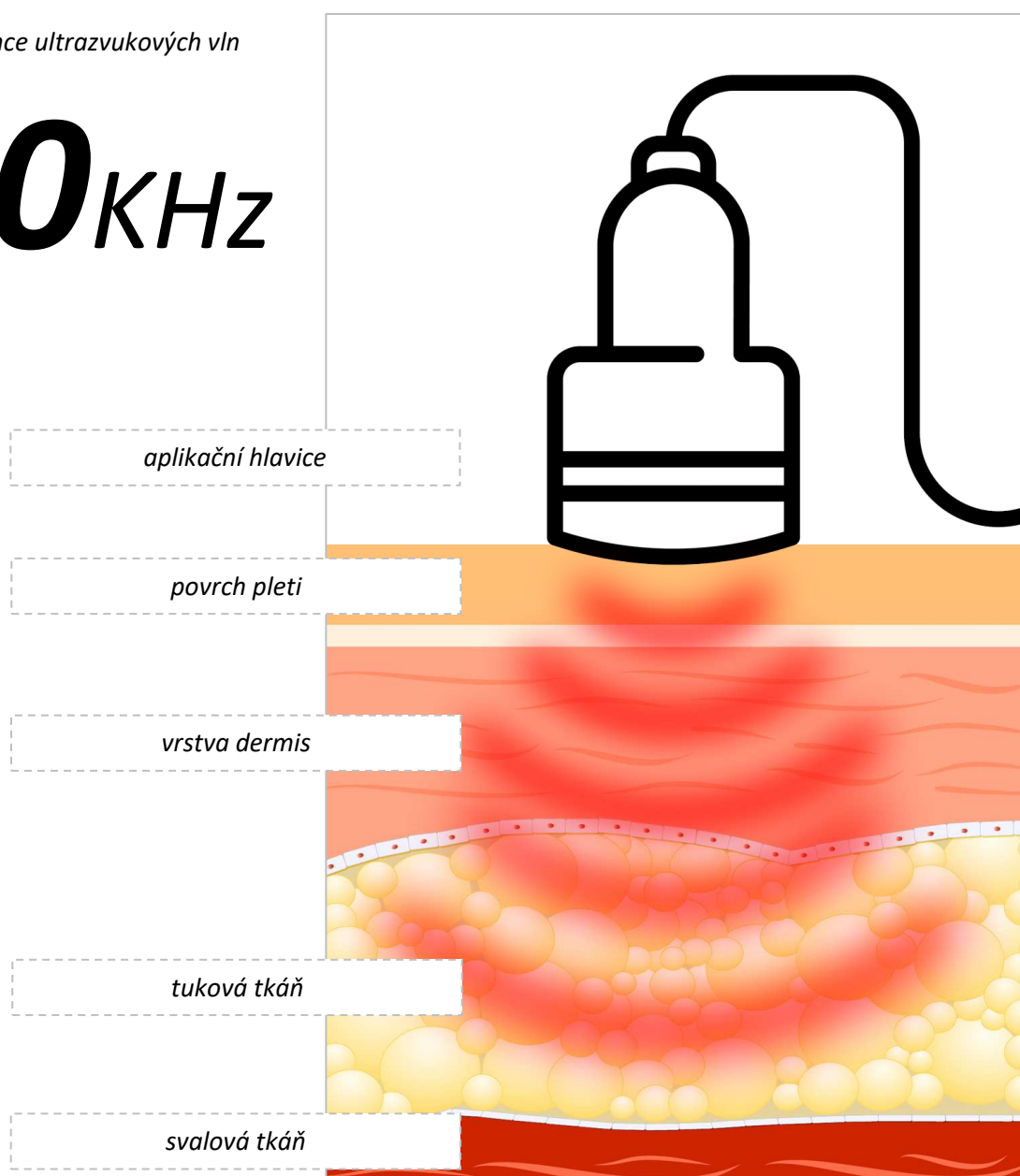

## RADIOFREKVENCE

Aplikační hlavice generuje energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.




## ČERVENÉ SVĚTLO

- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- Příznivý vliv na elastická vlákna
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni
- Brání v tvorbě pigmentu
- Vlnová délka: 625nm



## VAKUOVÉ NASÁVÁNÍ

Vakuová masáž patří mezi nejúčinnější způsoby pro redukci projevů celulitidy. Hnětení pomocí podtlaku zajišťuje správné proudění lymfy v těle. Přispívá k odvádění nečistot z krve. Prostřednictvím podtlakové terapie lze tělo zbavit nežádoucích otoků a nevzhledně vypadající pomerančové kůže.

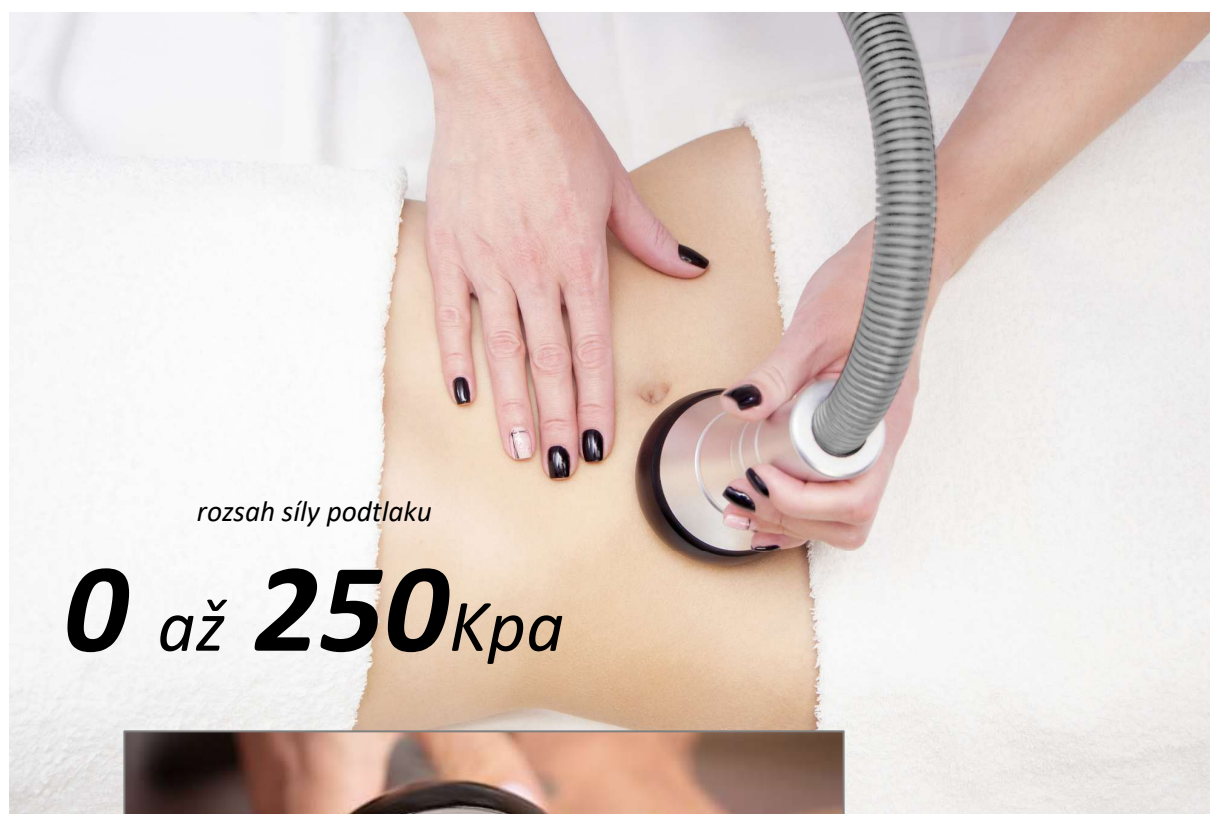

## **VAKUOVÉ NASÁVÁNÍ**

### ***Aplikátor s vakuovým sáním a přidavnou funkcí radiofrekvence***

Lymfatická masáž patří mezi nejúčinnější způsoby pro redukci projevů celulitidy. Rytmické hnětení svalů zajišťuje správné proudění lymfy v těle. Přispívá k odvádění nečistot z krve. Prostřednictvím podtlakové terapie lze tělo zbavit nežádoucích otoků a nevzhledně vypadající pomerančové kůže.

Masáž probíhá cyklicky ve třech fázích:

1. Nasátí podkožní tkáně
2. Ruční pohyb aplikátoru na vybrané části těla
3. Postupné uvolnění vytvořeného podtlaku

Kombinace podtlaku a pohybu aplikátoru, který mechanicky stimuluje pokožku okrajem aplikační hlavice, vzniká intenzivní kompresní lymfatická masáž. Snadno ošetříte všechny problematické partie. Maximálně se přizpůsobí vašim křivkám.



## **RADIOFREKVENCE**

### ***Aplikátor s multipolární radiofrekvencí***

Aplikační hlavice generuje energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.



## **ULTRAZVUK**


### ***Aplikátor s ultrazvukovou kavitací***

Aplikační hlavice s velkou kontaktní plochou generuje ultrazvukové vlny, které aktivně stimulují tukovou tkáň. Dochází k narušení integrity tukové buňky a uvolňuje se tuk. Uvolněný tuk se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Odstraněný tuk se zpět do tkáně nevrací. Ultrazvuková kavitace je bezbolestná, neinvazivní, šetrná, účinná a hlavně trvalá metoda pro odstranění tukové tkáně, redukci celulitidy a vyhlazení pokožky.



## POPIS PŘÍSTROJE

### *Horní strana hlavní jednotky*

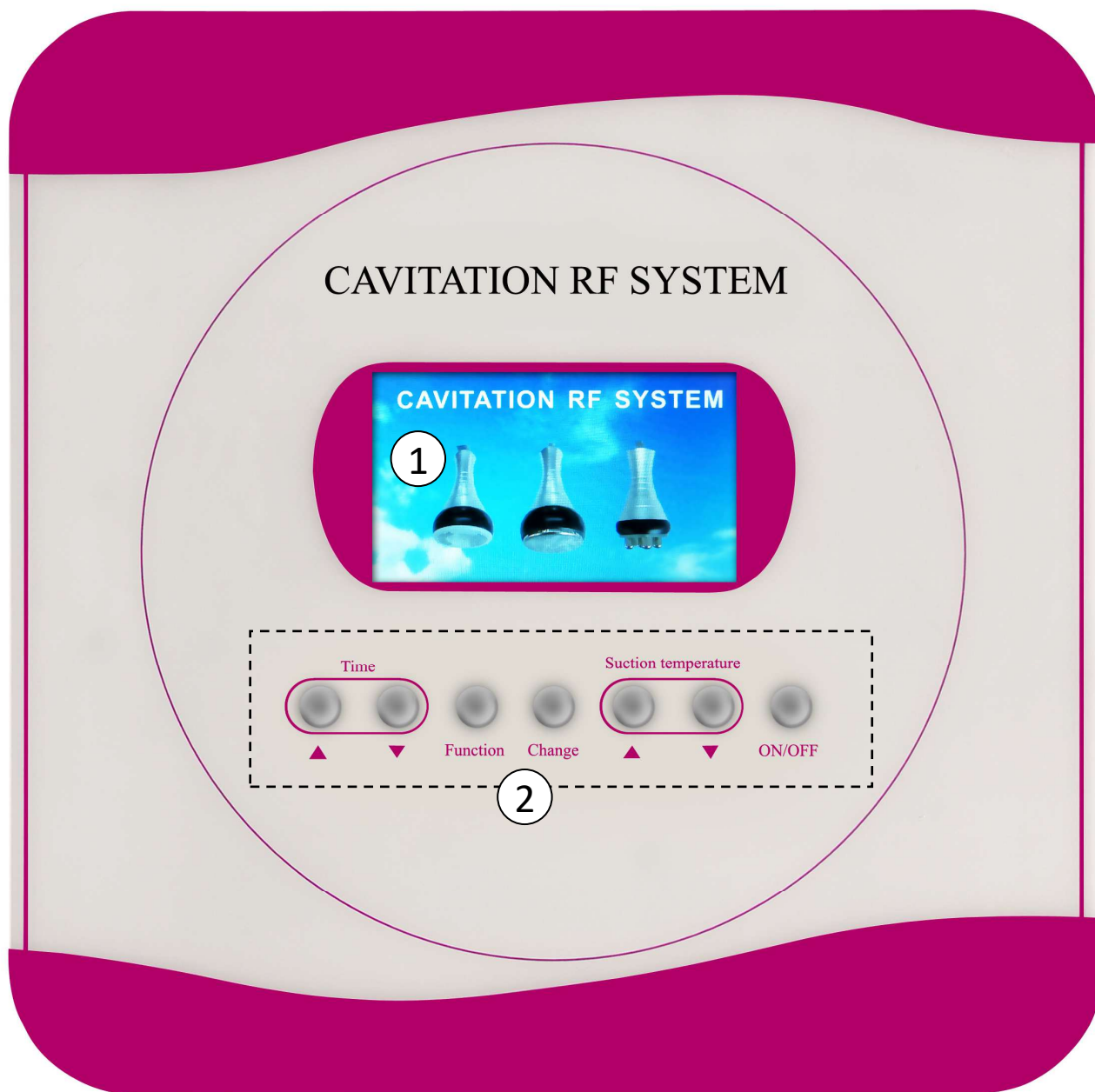


1. Displej

2. Ovládací panel



## POPIS PŘÍSTROJE

### *Ovládací panel*

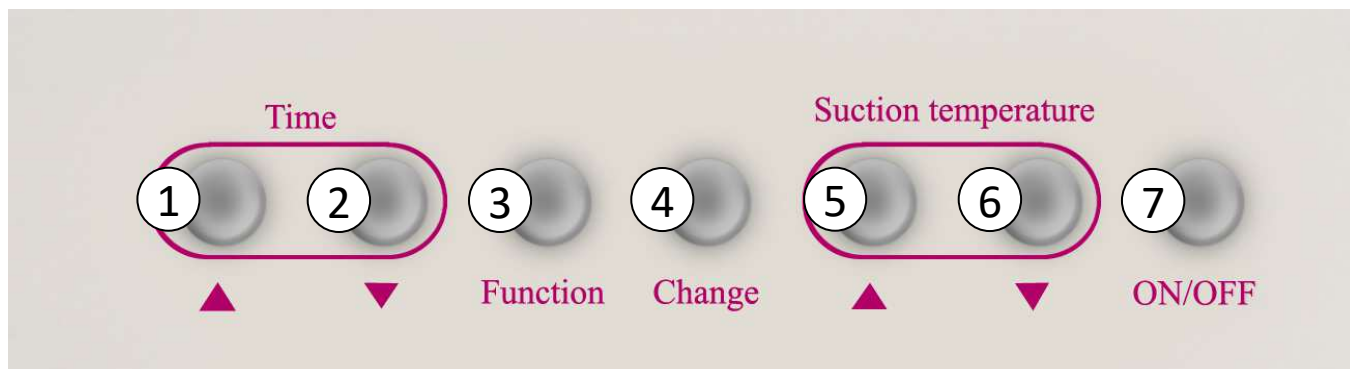


1. Tlačítko **Time** (čas) - zvýšení
2. Tlačítko **Time** (čas) - snížení
3. Tlačítko **Function** (funkce)
4. Tlačítko **Change** (změna)
5. Tlačítko **zvýšení** (podtlak/teplota)
6. Tlačítko **snížení** (podtlak/teplota)
7. Tlačítko **ON/OFF**



## POPIS PŘÍSTROJE

### *Boční strana hlavní jednotky*

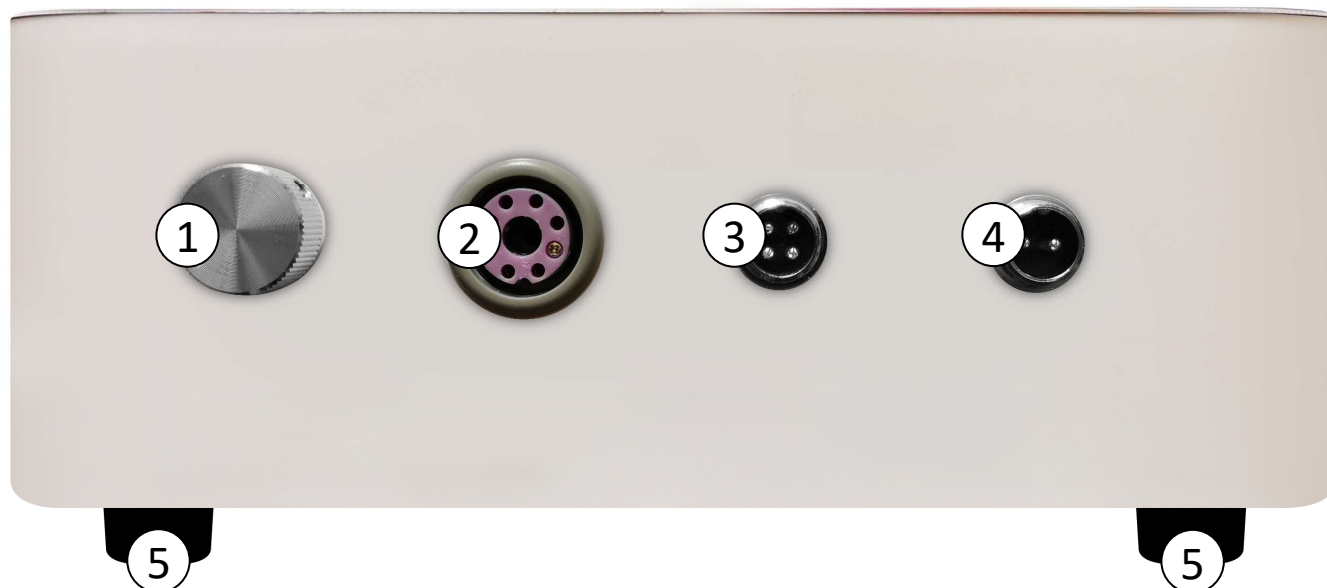

1. Otočné tlačítko - síla podtlaku

Otočení **po směru** hodinových ručiček - **zvýšení**

Otočení **proti směru** hodinových ručiček - **snížení**

2. Vstup pro kabel hlavice s vakuovým sáním


3. Vstup pro kabel hlavice s radiofrekvencí

4. Vstup pro kabel s ultrazvukem

5. Nožičky

## **POPIS PŘÍSTROJE**

### ***Zadní strana hlavní jednotky***

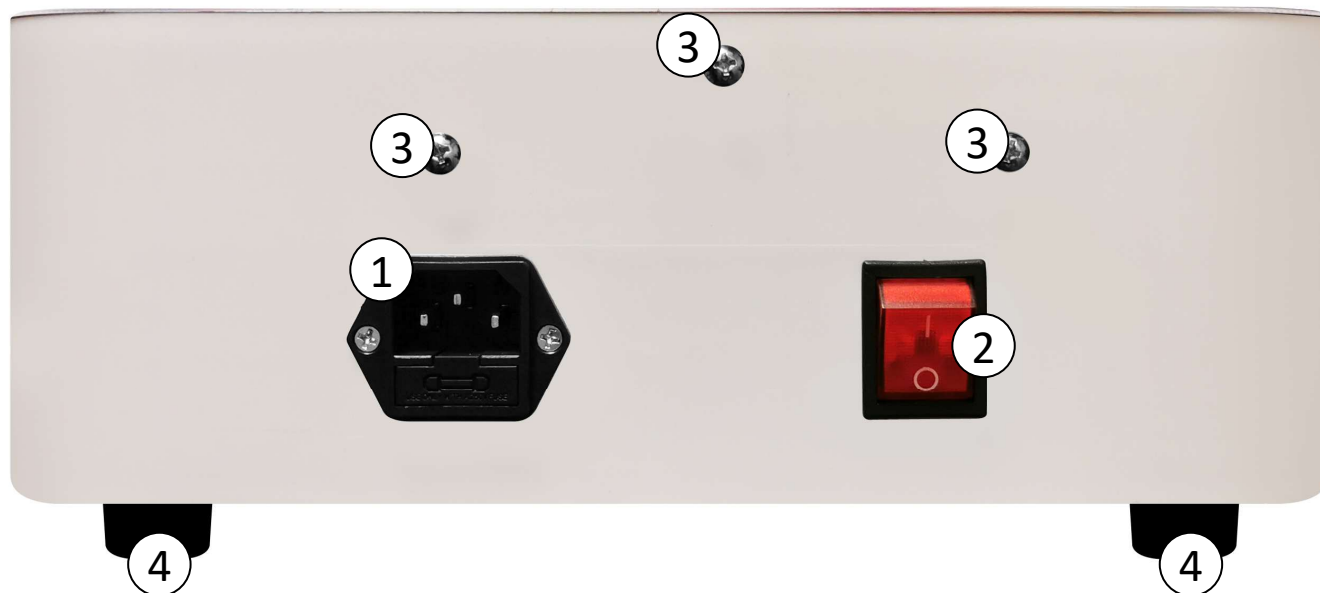

- 1. Vstup pro napájecí kabel
- 2. Hlavní tlačítko ON/OFF
- 3. Šroubky pro uchycení držáku na aplikační hlavice
- 4. Nožičky

## POPIS PŘÍSTROJE

### *Spodní strana hlavní jednotky*



1. Mřížka ventilátoru – **NESMÍ BÝT NIKDY ZAKRYTA BĚHEM PROVOZU PŘÍSTROJE**  
2. Nožičky

## POPIS PŘÍSTROJE


### *Aplikační hlavice*



1. Aplikační hlavice - **ultrazvukové vlny**
2. Aplikační hlavice - **vakuové nasávání s radiofrekvencí**
3. Aplikační hlavice - **radiofrekvence**



## POPIS DISPLEJE - ULTRAZVUKOVÉ VLNY

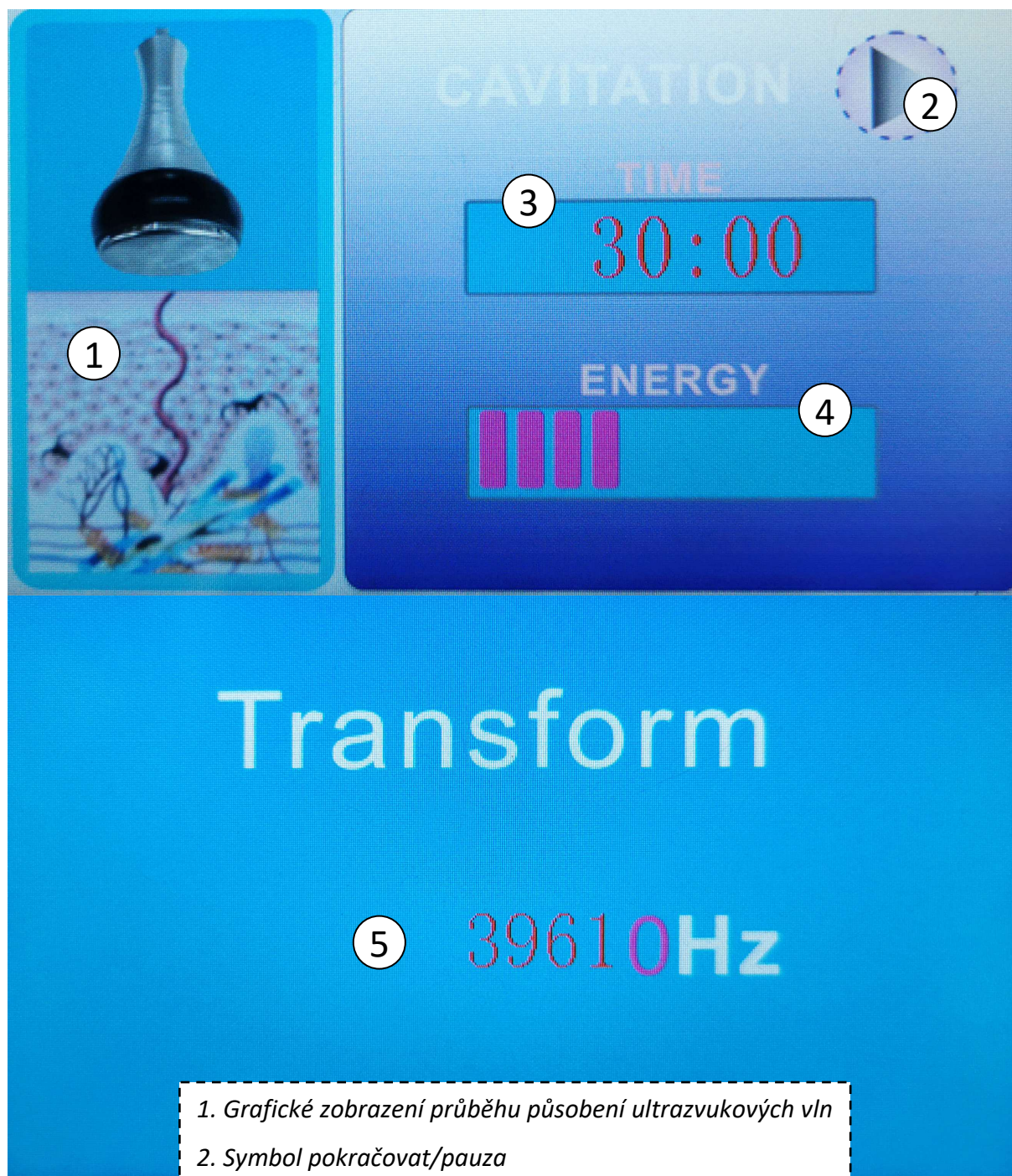

1. Grafické zobrazení průběhu působení ultrazvukových vln
2. Symbol pokračovat/pauza
3. Zobrazení času
4. Zobrazení výkonu 1 – 10
5. Nastavení frekvenčního rozsahu


## POPIS DISPLEJE - RADIOFREKVENCE



1. Grafické zobrazení průběhu působení radiofrekvence
2. Symbol pokračovat/pauza
3. Zobrazení času
4. Zobrazení výkonu 1 - 10



## POPIS DISPLEJE - VAKUOVÉ SÁNÍ

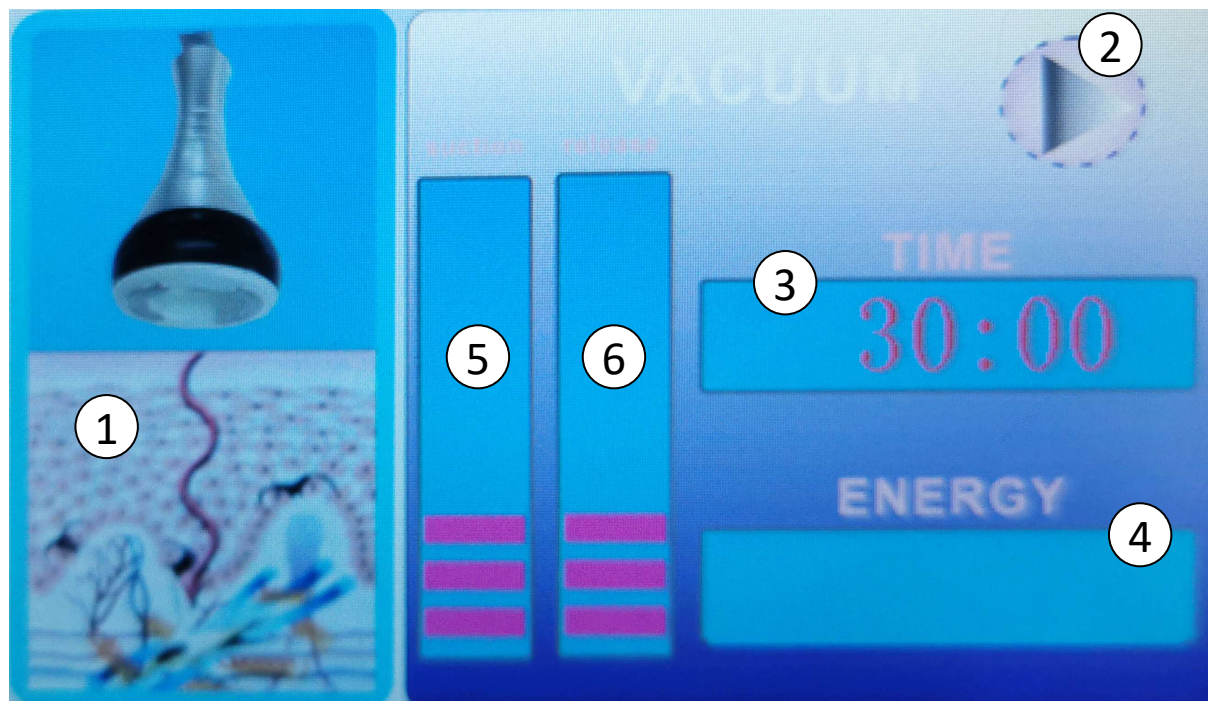

1. Grafické zobrazení průběhu působení vakuového sání
2. Symbol pokračovat/pauza
3. Zobrazení času
4. Zobrazení výkonu radiofrekvence 1 – 10
5. Čas vytváření podtlaku
6. Čas uvolnění podtlaku

## INSTALACE PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE

Připojte k hlavní jednotce všechny tři aplikační hlavice. Vstupy se nachází na boční straně hlavní jednotky. **Vždy dbejte na to, aby byl konektor správně zapojen do zdířky ve správném úhlu. Konektor má přesně daný úhel, pod kterým ho lze zapojit do zdířky.** Úhel je dán vykrojenou plochou, která přesně zapadne.



Konektor aplikační hlavice radiofrekvence a ultrazvukových vln mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. **Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.**

## INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁK

Součástí balení je průhledný držák. Slouží pro uchycení aplikačních hlavice. Držák připevněte jednoduše k hlavní jednotce pomocí šroubků, které jsou v závitech již umístěny. Šroubky odšroubujte, přiložte držák a zpět zašroubujte. Použijte křížový šroubovák. **Šroubky neutahujte příliš velkou silou. Mohlo by dojít k prasknutí plastového držáku.** Může se stát, že bude třeba šroubky po nějakém čase znovu dotáhnout.



## **INSTALACE PŘÍSTROJE - FILTRAČNÍ TAMPÓNEK**


Hlavice s vakuovým sáním je vybavena filtračním tampónkem. Vytváří nezbytnou ochranu před vniknutím nečistot nebo částic kontaktního gelu dovnitř podtlakového systému. Postup výměny filtračního tampónku je následující:

1. Na spodku vnitřní strany aplikační hlavice je umístěna bílá gumová čepička.
2. Gumovou čepičku odstraňte. Dostanete se tak do nejspodnějšího místa vakuové hlavice.
3. Vložte filtrační tampónek.
4. Vraťte nazpět gumovou čepičku na své místo zatlačením.
5. Ujistěte se, že je bílá gumová čepička umístěná nadoraz.
6. Doporučujeme ověřit stav filtračního tampónku po každém přibližně desátém použití hlavice s vakuovým sáním. Pokud je výrazně zasažen vlhkostí, je špinavý nebo je pokrčený, což je v rozporu s jeho funkcí, vyměňte jej za nový. Několik kusů filtračních tampónků je součástí balení. Pokud budete potřebovat nové balení, kontaktujte prosím prodejce/distributora.




## **INSTALACE PŘÍSTROJE - VÝMĚNA POJISTKY**

Přístroj je vybaven pojistkou. Slouží jako ochrana přístroje v případech, kdy by ve vaší elektrické síti došlo nedopatřením k přepětí. Pojistka nedovolí při vyšším napětí, aby proniklo do elektroniky přístroje, což by vedlo k fatálnímu poškození. Pojistku je v tomto případě nezbytné vyměnit za novou.

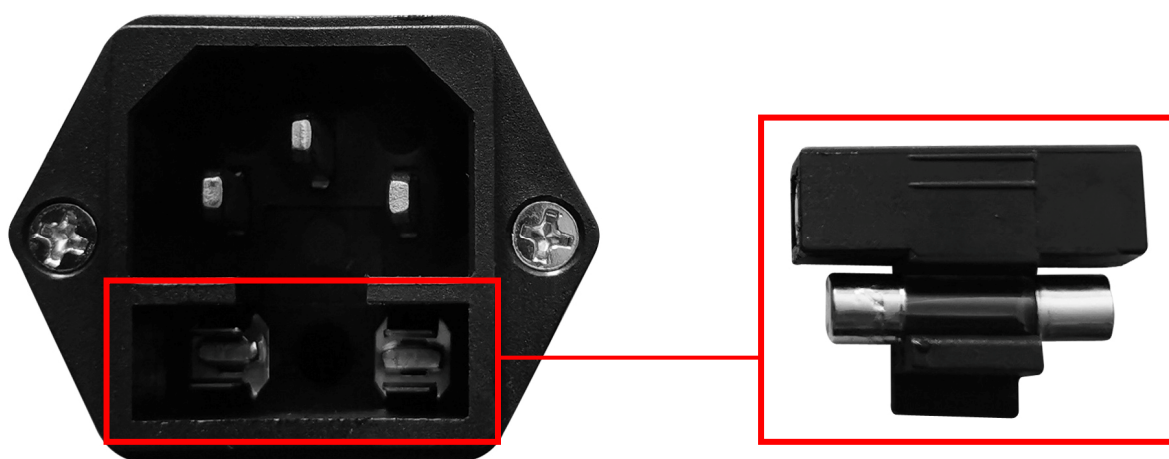

Pojistka je umístěna na konci plastové konzole. V držáku je prostor pro jednu náhradní pojistku.

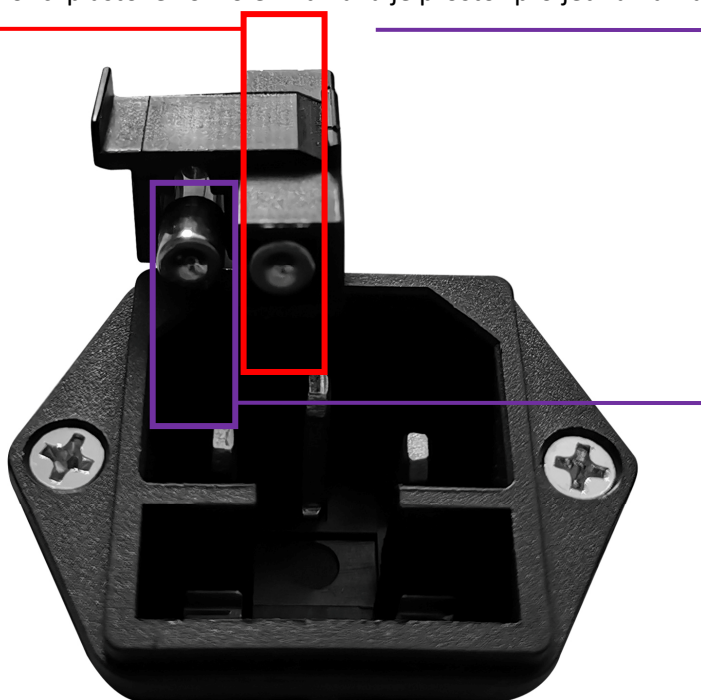

Pokud je přístroj připojen k napájecímu kabelu, ale přesto nefunguje, vždy zkontrolujte pojistku a případně ji vyměňte za novou. Pokud budete potřebovat nové náhradní pojistky, kontaktujte prosím prodejce/distributora.





## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ULTRAZVUK

1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje.  
Poloha 1 – zapnuto. Tlačítko se rozsvítí. Přístroj se nachází v pohotovostním režimu - displej se aktivuje a zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.




2. Pomocí tlačítka **Function** zvolte program **CAVITATION**.

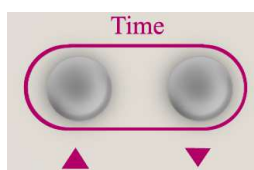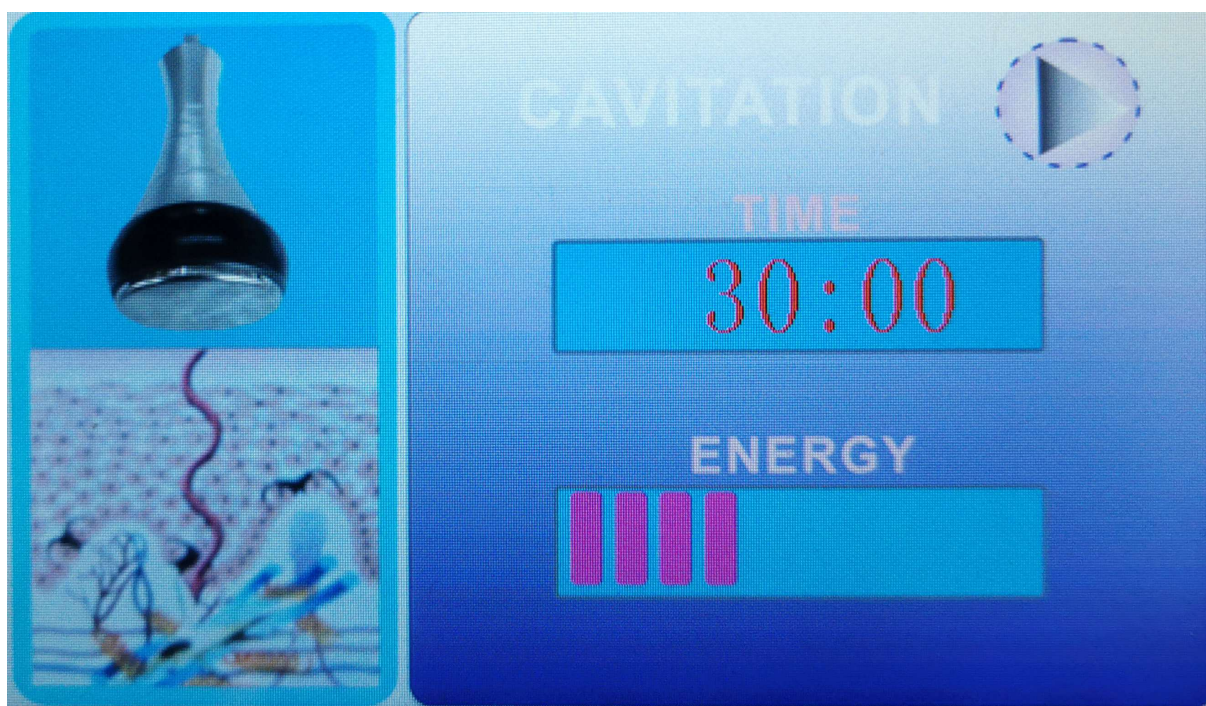



3. Pomocí tlačítka   si můžete nastavit čas ošetření v rozsahu od 1 do 60 minut.

4. Pomocí tlačítka  si můžete nastavit frekvenci ultrazvukových vln. Pomocí tlačítka

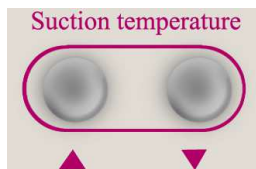

zvýšíte nebo snížíte hodnotu frekvence. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení výběru.

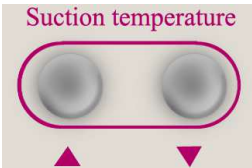5. Pomocí tlačítka  si můžete nastavit výkon ultrazvuku. Rozsah nastavení je od hodnoty 1 až 10. Vždy začínejte od hodnoty 1 a přidávejte pomalu se zvýšenou opatrností.

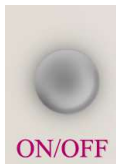6. Pomocí tlačítka  zahájíte ošetření pomocí ultrazvukových vln. Aplikační hlavice nyní generuje ultrazvukové vlny. Průběh ošetření zobrazuje animace na levé straně displeje.

7. Pomocí tlačítka  můžete ošetření kdykoliv přerušit a znovu pokračovat.


8. Pomocí tlačítka  můžete kdykoliv změnit režim ošetření.

9. Po uplynutí času se přístroj navrátí zpět do pohotovostního režimu. Displej zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.

10. Zvolte pomocí tlačítka  další režim ošetření nebo přístroj vypněte pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 0 – vypnuto. Tlačítko zhasne. Displej se vypne.

## NASTAVENÍ INTENZITY/FREKVENCE ULTRAZVUKU

Každé tělo je originál. Na různých částech těla máme různě silnou tukovou tkáň. S ohledem na odlišnost tukové tkáně je třeba pracovat s výkonem přístroje. Při vývoji estetického přístroje BeautyRelax BR-1960 byl kladen velký důraz na univerzálnost používání. Dávkování intenzity a frekvence ultrazvuku umožňuje použití přístroje každému, kdo splňuje podmínky použití a netýká se ho žádný stav uvedený v seznamu kontraindikací. Na ovládacím panelu si můžete nastavit frekvenci

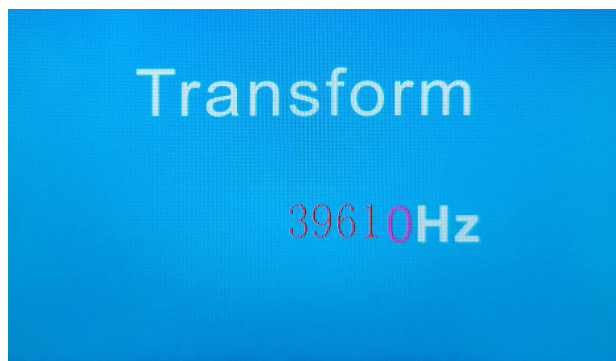

ultrazvuku v rozsahu od 29690Hz až 39610Hz. Navíc si můžete nastavit sílu působení ultrazvuku od úrovně 1 (malá) až 10 (nejvyšší). V obecné rovině platí, čím větší tělesná partie, tím větší množství podkožního tuku. Je tedy třeba pracovat s vyšším výkonem. **Frekvenci ultrazvuku (Hz) doporučujeme neměnit a ponechat na výchozím nastavení. Čím je frekvence ultrazvuku nižší, tím se postupně snižuje komfort použití aplikační hlavičky na pleti.**

### JAK TEDY SPRÁVNĚ ROZPOZNAT, JAKÝ STUPEŇ VÝKONU NASTAVIT?

Při nastavení postupujte následovně. Vždy začínějte na výkonu číslo 1 a základní frekvenci 29690Hz. Snažte se pocitově vnímat, jak působí ultrazvukové vlny na konkrétní tělesnou partii. Při používání můžete cítit jemné mravenčení, ale samotné ultrazvukové vlny by neměly způsobit nepříjemné až bolestivé pocity. Hlavním smyslem využití technologie ultrazvukových vln je neinvazivní a hlavně bezbolestné použití. Věnujte tedy zvýšenou pozornost, aby vám nastavený výkon nezpůsobil žádné nepříjemné pocity. Nelze přesně stanovit, jaký stupeň výkonu použít na konkrétní partii. Rozhodně neplatí, čím větší výkon použijete, tím rychleji dosáhnete požadovaných výsledků v redukci podkožního tuku. S nastavením výkonu je třeba zacházet velice opatrně. Vyšší výkon ultrazvukových vln uvolní v tukové tkáni do krevního oběhu více energie, kterou musí vaše játra následně zpracovat. V očekávání na dosažení požadovaných výsledků nespěchejte. I při vysoce sofistikovaném typu ošetření, jakou ultrazvuková kavitace rozhodně je, v lidském organismu probíhají určité procesy, které je třeba respektovat. Proto začínějte vždy na úrovni intenzity 1. Přidávejte postupně a s citem. Může i nastat situace, že nikdy nevyužijete celou škálu výkonu. Ponechávejte mezi ošetřeními vybraných tělesných partií větší časový rozestup - viz. pasáž **ČAS OŠETŘENÍ**. I přes šetrnost a neinvazivní charakter technologie je vaše zdraví na prvním místě.

### DŮLEŽITÉ TIPY PŘI POUŽITÍ FUNKCE S ULTRAZVUKOVÝMI VLNAMÍ

- Při použití ploché aplikační hlavičky s ultrazvukem se vždy snažte, aby byla celá plocha aplikátoru v plném kontaktu s pletí.
- Použití je vždy spojeno se sonickým gelem. Hlavici s ultrazvukem nikdy nepoužívejte na suchou pokožku.
- Sonický gel můžete nanést na pleť nebo přímo na aplikační hlavičku. V průběhu ošetření vybrané partie sonický gel postupně doplňujte. Gel nanášejte postupně a po částech. Pokud se rozhodnete zaměřit se na obě stehna, nejprve naneste gel na jednu nohu, použijte aplikační hlavičku s ultrazvukem a poté naneste gel na druhou nohu. Gel se v průběhu použití postupně vstřebává a vysychá, proto je třeba jej pravidelně na pleť doplňovat. S množstvím nešetřete. Jde o přípravek, který je cenově velmi dostupný.
- V průběhu použití ultrazvuku můžete vnímat pískání. Nejedná se o závadu přístroje, ale přirozený průvodní jev působení ultrazvuku. Pokud je vám pískání nepříjemné, snižte úroveň intenzity působení ultrazvuku. K dispozici je rozsah od 1 do 10.

## ČAS OŠETŘENÍ

Čas ošetření by neměl přesáhnout **15 minut**. V případě párové části těla rozdělit tento čas na polovinu. Tzn. 7,5 minuty jedno stehno a 7,5 minut druhé stehno.

Ošetřit lze najednou maximálně dvě partie ve frekvenci maximálně jedenkrát do týdne. Stejnou partii je možné ošetřit nejdříve za 7 dní.

### Příklad rozvrhu ošetření těla


| <b>Pondělí</b>      | <b>Úterý</b> | <b>Středa</b> | <b>Čtvrtek</b>        | <b>Pátek</b> | <b>Sobota</b> | <b>Neděle</b> |
|---------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>paže + lýtka</i> | <i>volno</i> | <i>volno</i>  | <i>stehna + lýtka</i> | <i>volno</i> | <i>volno</i>  | <i>volno</i>  |

### Proč volné dny?

Při ošetření těla estetickým přístrojem s funkcí ultrazvukové kavitace je nezbytně nutné dát tělu nějaký čas, aby mohlo přirozenou cestou zpracovat uvolněnou energii. Tukové buňky se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Po ukončení tohoto procesu je možné bezpečně přístrojové ošetření opakovat.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Použití přístroje je vždy spojeno s aplikací sonogelu. Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Pokud přístroj používá více osob, je třeba provést dezinfekci povrchu aplikační hlavice. Ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost.

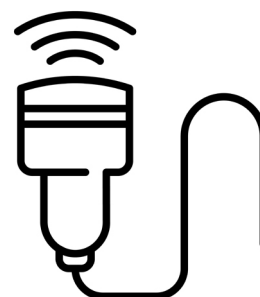

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ HLAVICE ULTRAZVUKEM

Při použití hlavice s technologií ultrazvuku je nezbytné aplikovat na povrch pleti dostatečné množství sonogelu. **Hlavice se nesmí používat na suchou pokožku.** V průběhu použití sonogel z pleti postupně vysychá. **Průběžně tedy gel doplňujte**, aby hlavice stále po gelu klouzala.



## POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ - ULTRAZVUK





## UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - ULTRAZVUK

### PAŽE



*Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na ruce. Aplikační hlavici přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně ošetřete vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujte se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.*



*Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem ošetřete postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.*

## PAS & BŘÍŠKO

*Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživém pohybu. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.*

*Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.*

*Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.*

## HÝŽDĚ

*Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.*

*Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.*

*Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto ošetřit celou oblast hýždí.*



## STEHNA & LÝTKA

*Aplikační hlavicí se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.*

*Aplikační hlavicí se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.*



*Aplikační hlavicí se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete ošetřit přední i zadní část končetiny.*

## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - VAKUOVÉ SÁNÍ


1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje.  
Poloha 1 – zapnuto. Tlačítko se rozsvítí. Přístroj se nachází v pohotovostním režimu - displej se aktivuje a zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.



2. Pomocí tlačítka **Function** zvolte program **VACUUM**.

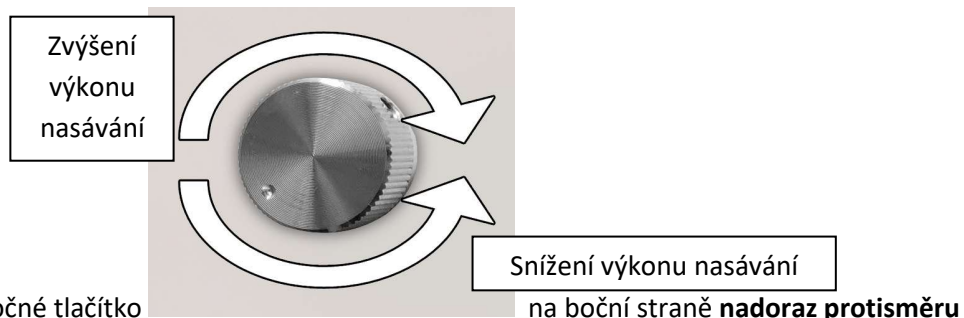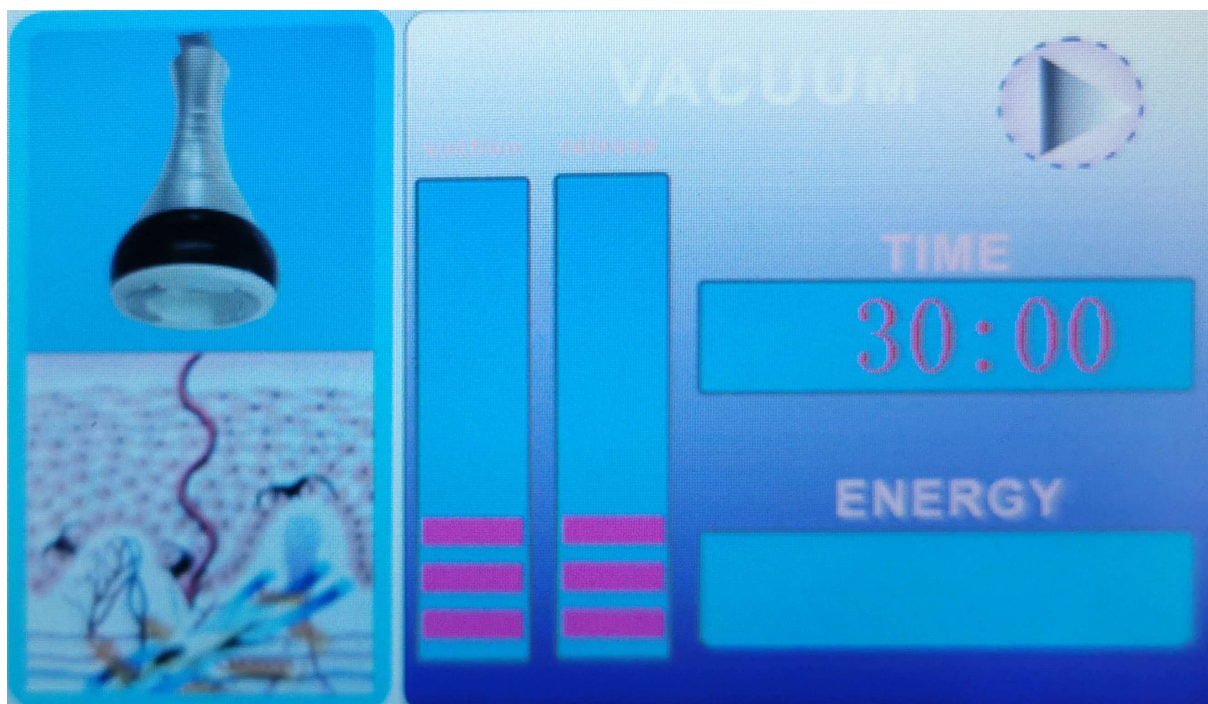


3. Ověřte, že je otočné tlačítko na boční straně **nadoraz protisměru hodinových ručiček** – výchozí výkon vakuového sání.

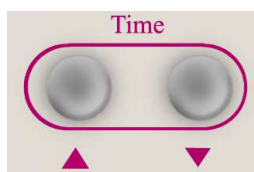

4. Pomocí tlačítka si můžete nastavit čas ošetření v rozsahu od 1 do 60 minut.




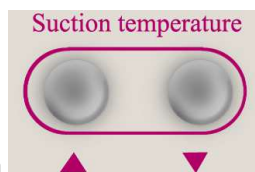

5. Pomocí tlačítka   si můžete nastavit délku vakuového sání v rozsahu hodnoty od 1 do 10.



6. Stiskněte tlačítko  pro nastavení délky uvolnění vakua. Pomocí tlačítka

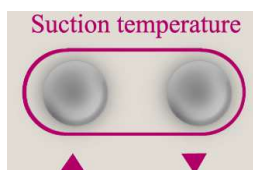


  si můžete nastavit délku uvolnění vakua v rozsahu hodnoty od 1 do 10.



7. Stiskněte tlačítko  pro nastavení výkonu radiofrekvence. Rozsah nastavení je od hodnoty 1 až 10. Vždy začínejte od hodnoty 1 a přidávejte pomalu se zvýšenou opatrností. Řídit se můžete vnímáním tepla, které je průvodním jevem působení radiofrekvence. Pokud žádnou hodnotu nenastavíte, funkce působení radiofrekvence bude vypnuta.



8. Pomocí tlačítka  zahájíte ošetření pomocí vakuové hlavice. Aplikační hlavice nyní generuje vakuové sání v kombinaci s radiofrekvencí. Průběh ošetření zobrazuje animace na levé straně displeje.

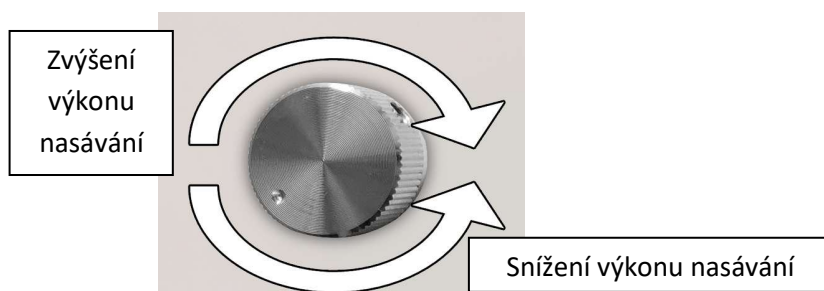

9. Pomocí otočného  kolečka na boční straně si můžete nastavit sílu působení vakuového sání. Výkon zvyšujte vždy pomalu se zvýšenou opatrností.
10. V průběhu působení vakuového sání můžete slyšet jemné cvakání. Jedná se o průvodní zvuk vzduchového čerpadla. Tento typ zvuku je v pořádku a není závadou.



11. Pomocí tlačítka **ON/OFF** můžete ošetření kdykoliv přerušit a znovu pokračovat.



12. Pomocí tlačítka **Function** můžete kdykoliv změnit režim ošetření.

13. Po uplynutí času se přístroj navrátí zpět do pohotovostního režimu. Displej zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.



14. Zvolte pomocí tlačítka **Function** další režim ošetření nebo přístroj vypněte pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 0 – vypnuto. Tlačítko zhasne. Displej se vypne.



## UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE – VAKUOVÉ SÁNÍ

### **pohybová masáž**

Aplikační hlavici se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka co nejlépe hydratovaná pomocí kontaktního gelu. **Nikdy nepoužívejte masáž přístrojem na sucho, ale v kombinaci s kontaktním sonogelem.** Při pohybové masáži je důležité nastavit sílu nasávání na co nejmenší úroveň. Zároveň nastavit co nejdelší interval uvolnění vakua. Pokud přístroj nasaje část těla až příliš silně, aplikátorem už nebude možné pohnout.




### **bodová masáž**

Bodová masáž spočívá v ošetření konkrétní tělesné partie po částech – viz. obrázek. Přístroj zapněte a přiložte aplikátor k pleti. Po nastavení všech parametrů spustí přístroj funkci nasávání v síle a délce, kterou si sami zvolíte. Při bodové masáži může po ošetření pleť zarudnout. Pokud si nastavíte nasávání příliš silné, mohou se na pleti objevit i mírné otoky až modřiny, které však v průběhu několika dní zcela zmizí. Vždy začínejte na nižší síle působení vakua a postupně si přidávejte dle vašeho pocitu. **Rozhodně hned nezačínajte na nejvyšších hodnotách!**



Při ošetření ostatních částí těla postupujte podle následující grafické vizualizace. Rozdíl mezi pohybovou a bodovou masáží spočívá nejen v odlišné technice, ale v účinku působení na tělo. **Pohybová masáž** přispívá zejména ke zlepšení činnosti lymfy. Tělo získá lepší odvádět nadbytečnou vodu z končetin. Při **bodové masáži** podpoříte lokální krevní oběh, což přispívá k celkové efektivnější látkové výměně a odvodu škodlivin. Ideální na použití partií s výskytem příznaků celulitidy (pomerančové kůže).

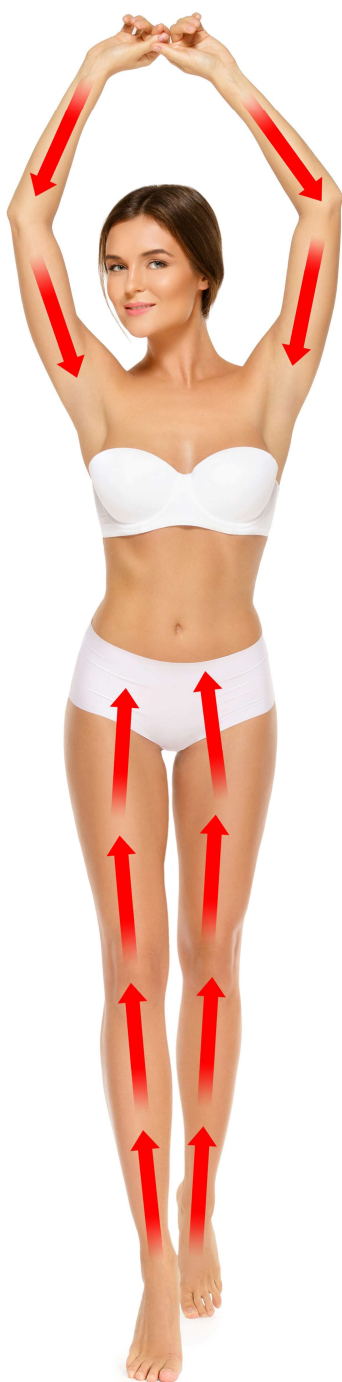

**pohybová masáž**



**bodová masáž**

## POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ - VAKUOVÉ SÁNÍ

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



### DŮLEŽITÝ TIP K POUŽÍVÁNÍ VAKUOVÉ HLAVICE

Před použitím vakuové hlavice doporučujeme na pleť aplikovat masážní olejíček libovolné značky. Nezáleží na značce, ale olejové konzistenci. Aplikační hlavice bude po těle lépe klouzat. Olejíček navíc tak rychle nevysychá ve srovnání se sonogelem. V tomto případě nedoporučujeme aktivovat funkci radiofrekvence na vakuové hlavici. Olejová konzistence a přípravek si s radiofrekvencí příliš „nerozumí“. Pro ošetření těla radiofrekvencí použijte aplikační hlavici se 4 kolíčky. Pokud si přesto přejete používat vakuovou hlavici s radiofrekvencí, kterou přenáší dvě kontaktní plochy, aplikujte na pleť sonogel.





## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE – RADIOFREKVENCE


1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje.  
Poloha 1 – zapnuto. Tlačítko se rozsvítí. Přístroj se nachází v pohotovostním režimu - displej se aktivuje a zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.




2. Pomocí tlačítka **Function** zvolte program **FACE RF**.

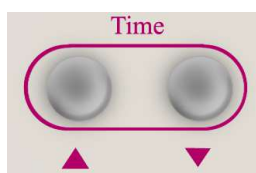

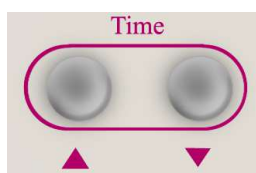
3. Pomocí tlačítka  si můžete nastavit čas ošetření v rozsahu od 1 do 60 minut.

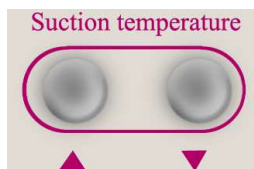

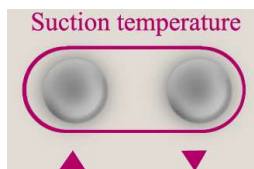4. Pomocí tlačítka  si můžete nastavit intenzitu radiofrekvence v rozsahu hodnoty od 1 do 10. Rozsah nastavení je od hodnoty 1 až 10. Vždy začínejte od hodnoty 1 a přidávejte pomalu se zvýšenou opatrností. Řídit se můžete vnímáním tepla, které je průvodním jevem působení radiofrekvence.



5. Pomocí tlačítka **ON/OFF** zahájíte ošetření pomocí radiofrekvence. Aplikační hlavice nyní generuje radiofrekvenční vlny. Průběh ošetření zobrazuje animace na levé straně displeje.

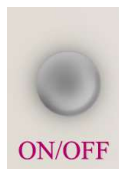

6. Pomocí tlačítka **ON/OFF** můžete ošetření kdykoliv přerušit a znovu pokračovat.



7. Pomocí tlačítka **Function** můžete kdykoliv změnit režim ošetření.

8. Po uplynutí času se přístroj navrátí zpět do pohotovostního režimu. Displej zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.



9. Zvolte pomocí tlačítka **Function** další režim ošetření nebo přístroj vypněte pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 0 – vypnuto. Tlačítko zhasne. Displej se vypne.

## DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

- BR-1960 BODYFACE ULTIMATE je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
  - Neinvazivní provoz je základní předpoklad pro používání přístroje uživatelem v domácím prostředí. Používání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
  - BR-1960 BODYFACE ULTIMATE je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
  - Ošetření by mělo být vždy spojeno s čirým vodivým gelem nebo jiným kosmetickým přípravkem na gelové bázi. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Radiofrekvenční vlny získají lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken. Pokud je to jen možné, vyhněte se vodivému gelu s přidanými aromaty nebo barvivy. Pleť citlivějších uživatelů by nemusela zareagovat pozitivně.
  - **Pokud budete aplikační hlavici držet na pleti příliš dlouho v řádech několika sekund a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření (radiofrekvence), přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností. Pokud by nebyl přístroj dostatečně výkonný, nebylo by možné dosáhnout požadovaných výsledků.**
  - Pokud je to jenom možné, snažte se aplikační hlavici vyhnout oblastem s velmi tenkou a citlivou pokožkou. Pokud je menší vrstva podkožního tuku, pracujte s nižšími hodnotami výkonu nebo se této části pleti vyhněte úplně.
- Aplikační hlavici se po pleti můžete pohybovat různými způsoby. Krátkými táhlými pohyby nebo krátké bodové ošetření – tzv. razítkování. Pokud budete držet hlavici příliš dlouho v kontaktu s pletí (radiofrekvence), nakumuluje se takové množství energie, které zvýší teplotu aplikátoru. Před dalším přiložením na pleť proto nechte časovou prodlevu v řádu sekund. Zvýšení teploty aplikátoru není závadou přístroje, ale průvodní jev působení radiofrekvenčních vln po delší dobu. Začnějte s krátkým „tukaním“ na pleť a pocitově postupně délku prodlužujte.**
- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte aplikační hlavici. Ideální je použití čirého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavice.
  - Při používání červeného světla není třeba ochranných pomůcek zraku. Přesto je striktně doporučeno nedívat se při používání přímo do zdroje světla. Pokud byste tak činili opakovaně a dlouhodobě, mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.
  - V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat:  
Tel: 737 196 160 Email: mh@santadria.cz



## **DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE**

Po aplikaci pleti radiofrekvencí je důležité následovat specifickou péči, která podporuje regeneraci pokožky, zajišťuje maximální efekt procedury a minimalizuje riziko vedlejších účinků. Aplikace radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pleti, což může pokožku krátkodobě zahřát nebo lehce podráždit.

### **1. Hydratace a výživa**

Hydratační krémy a séra Používejte produkty obsahující kyselinu hyaluronovou nebo aloe vera, které zklidňují a hydratují pokožku.

Antioxidační produkty: Vhodné jsou přípravky s vitamíny C a E, které podporují regeneraci a chrání pleť před volnými radikály.

### **2. Ochrana před sluncem**

Po radiofrekvenci je pokožka citlivější na sluneční záření. Používejte krém s SPF 30 nebo vyšší minimálně po dobu 48 hodin, i když je zamračeno. Vyhněte se přímému slunečnímu záření po dobu 5 až 7 dnů, abyste minimalizovali riziko pigmentace.

### **3. Zklidnění pokožky**

Chladivé masky nebo obklady: Můžete použít produkty s výtažky z heřmánku, panthenolu nebo zklidňující termální vodou. Vyhněte se agresivním peelingům nebo produktům s aktivními složkami, jako jsou retinoidy nebo kyseliny (AHA, BHA), alespoň po dobu 3 až 5 dnů.

### **4. Dostatek hydratace organismu**

Pijte dostatek vody (minimálně 2 litry denně), abyste podpořili regeneraci a zdraví pokožky zevnitř.

### **5. Vyhněte se následujícím aktivitám**

Sauna a horké koupele: Vyhněte se extrémním teplotám alespoň 48 hodin po aplikaci.

Intenzivní cvičení: Nadměrné pocení může způsobit podráždění pokožky. Doporučuje se odložit fyzickou aktivitu na 1 až 2 dny.

Používání make-upu: Pokud možno, vyhněte se těžkému make-upu alespoň první den po aplikaci.

### **6. Postupné navracení k běžné péči**

Po 3 až 5 dnech můžete začít znovu používat aktivní složky ve vaší péči (např. retinol nebo exfolianty), ale pouze pokud je pokožka bez známek podráždění.

Reakce pokožky na radiofrekvenci se liší člověk od člověka. Mírné zarudnutí nebo pocit tepla jsou běžné a obvykle odezní do několika hodin. Tato doporučení vám pomohou maximalizovat efekt aplikace a podpořit regeneraci pleti. Dlouhodobé výsledky je možné dosáhnout kombinací správné péče, opakovaných aplikací a zdravého životního stylu.

## METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU - RADIOFREKVENCE



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

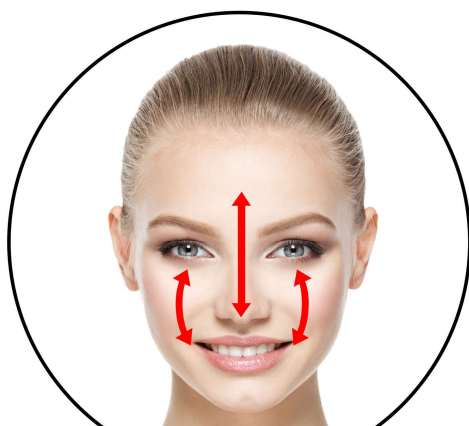

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



**Krk:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru



## **BEAUTYRELAX VIDEA NA YOUTUBE**

Instruktažní videa na model se stejnými/obdobnými funkcemi pro vaši inspiraci.



## NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

### **Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?**

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro ošetření jednotlivými technologiemi přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.



### **Jaké opatření je před a po ošetření nutno dodržovat?**

Minimálně 4 hodiny před ošetřením ultrazvukem nejzte těžká nebo mastná jídla. Doporučujeme lehká jídla (např. zeleninový salát, jogurt). Den před ošetřením, v den ošetření a několik dní po ošetření zvyšte váš pitný režim na 2 až 2,5 litru čisté vody denně. Vyhýbejte se perlivým a slazeným vodám. Týden po ošetření ultrazvukem byste se měli vyvarovat konzumaci alkoholu, kofeinu, nikotinu, těžkých a mastných jídel. Všechny tyto faktory zatěžují vaše játra, která jsou již tak zatížena filtrováním uvolněných tuků z vašeho těla. Další jejich zatížení by mohlo vést k nevolnosti či zhoršení zdravotního stavu. Po ošetření doporučujeme mírně zvýšit pohybovou aktivitu. Podpoříte tím výrazně krevní oběh a celkovou látkovou výměnu. Stimulace krevního oběhu a lymfatického systému podpoří vyplavení uvolněných tuků přirozenou cestou ven z těla.

### **Je ošetření technologiemi přístroje BeautyRelax Bodyface Ultimate bolestivé?**

Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné. Při použití ultrazvuku můžete cítit na pokožce pocity připomínající mravenčení až lehké brnění. Průvodním jevem působení radiofrekvence je pocit tepla.

### **Jak poznám, že aplikační hlavice opravdu generuje ultrazvukové vlny?**

Během ošetření můžete slyšet slabé pískání (každý uživatel může vnímat jinou míru pískání), které vydává ultrazvuk. Citliví jedinci mohou cítit jemné mravenčení na pleti. Jde o standardní průvodní jev ultrazvuku. Pro ověření funkčnosti ultrazvukových vln naneste drobné množství kapek vody na aplikační hlavici. Ultrazvukové vlny molekuly vody rozkmitají. Pokud je vám pískání nepříjemné, snižte úroveň intenzity působení ultrazvuku. K dispozici je rozsah od 1 do 10.

### **Jakých výsledků je možné dosáhnout?**

Výsledek je výrazně ovlivněn několika faktory. Uvolněný tuk musí tělo zpracovat. To, jak rychle jej zpracuje, závisí především na rychlosti metabolismu, typu vašeho tuku (zda je prorostlý až do svalové tkáně), stavu lymfatického systému nebo životosprávy. Za optimálních podmínek se může jednat až o několikacentimetrový úbytek po opakovaném ošetření při dodržení výše uvedené životosprávy. Estetický přístroj s funkcí ultrazvukové kavitace vnímejte jako užitečný nástroj, který vám napomůže ve vašem úsilí vypadat lépe. Pro dosažení vysněných cílů je třeba upravit životosprávu a zvýšit pohyb (mluvíme stále o lehké pohybové aktivitě, žádná extrémní fyzická zátěž, na kterou nejste případně zvyklí). Je to důležité, aby procesy, které estetický přístroj ve vašem těle nastartuje, mohly úspěšně a efektivně proběhnout.

**Je používání estetického přístroje s ultrazvukovou kavitací bezpečné?**

Pokud se přístroj používá na správných partiích a uživatelé neodpovídají některým z uvedených kontraindikací, je ultrazvuková kavitace naprosto bezpečná. Uvolněný tuk je organismus schopen postupně zpracovat. Výkon je speciálně nastaven tak, aby nedošlo k poškození ostatních buněk a cév. Znovu připomínáme, že je ošetření vždy spojeno se sonogelem. Ultrazvukové vlny se tak mohou na pokožku dostatečně navázat.

**Jaké zásady je nezbytné dodržovat, aby se požadovaný hubnoucí účinek dostavil?**

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, je nezbytné upravit životosprávu a zvýšit příjem tekutin. Ošetření ultrazvukovou kavitací můžete bez obav podstoupit již po 7 až 10 dnech. Nedoporučujeme ošetření více než dvou partií najednou. Pokud ošetřujete partie, které jsou blíže u sebe, efekt kavitace se násobí. V opačném případě (vzdálenějších partií) se efekt rozdělí. Rozhodně se vždy snažte vyhnout těm částem těla, kde jsou lymfatické uzliny - viz. grafická vizualizace v tomto návodu k obsluze, pasáž: **LYMFATICKÉ UZLINY**. Případný letmý náhodný pohyb nevadí. Aplikační hlavice však nesmí tyto vybrané části přímo stimulovat. Správná funkce lymfatických uzlin a dlouhodobá stimulace pomocí ultrazvukových vln se neslučují.

**Při používání aplikační hlavice s ultrazvukem vnímám pískání v uších. Jaká je příčina tohoto jevu? Jedná se o závadu přístroje?**

Neinvasivní technologie (ultrazvukové vlny, radiofrekvence, vakuová drenáž) spadají do kategorie neinvasivního ošetření – tzn. žádná část aplikační hlavice nepronikne skrz povrch pleti. Aby bylo možné technologiemi dosáhnout deklarovaných účinků, musí disponovat určitým výkonnostním rozsahem. V praxi to znamená, že může být lehce snížen komfort používání (ultrazvuk – akustické pískání, radiofrekvence – vnímání tepla, vakuová drenáž – mohou se objevit červené plochy až mírné podlitiny, které však postupně zmizí).

„Pískání“ je průvodní jev působení ultrazvuku. Je to důkaz, že se nejedná o „placebo efekt“, ale že hlavice disponuje skutečně touto technologií. Je to stejné, jako při návštěvě zubaře. Při ošetření oblasti úst při ústní hygieně používá přístroj s hrotem, na jehož konci se generuje ultrazvuk. Takto dochází k aktivnímu odstranění zubního plaku. Také je možné slyšet pískání a může to vést i k mírnému zalehnutí uší. Pro zmírnění tohoto průvodního akustického jevu doporučujeme následující tipy:

Každý člověk mívá hranici, kde je pískot nepříjemný, na jiné hranici. Zkuste mírně snížit výkon působení ultrazvukových vln pomocí tlačítka na ovládacím panelu.

V tomto návodu k obsluze se mrkněte na pasáž: **NASTAVENÍ INTENZITY/FREKVENCE ULTRAZVUKU**. Zkuste postupně měnit frekvenci ultrazvuku. Je zde šance, že by mohl být efekt pískání mírně snížen. V nastavení si můžete měnit také frekvenci ultrazvuku (Hz). Vždy mějte na paměti, čím je hodnota nižší, tím více můžete působení ultrazvukových vln vnímat na pleti. Pro maximální komfort použití se vždy snažte hodnotu neměnit a ponechat na výchozí hodnotě (čím vyšší hodnota Hz, tím lépe).

Pomocí nastavení výkonu působení ultrazvuku se můžete pokusit najít optimální kompromis mezi efektivitou použití ultrazvuku a komfortu použití. Pokud je vám pískání nepříjemné, snižte výkon, aby bylo používání maximálně komfortní.

**Proč je kladen důraz na péči o aplikační hlavici po každém použití?**

Kontaktní hlavici je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu a pečlivě dezinfikovat po každém jednotlivém použití. Ideálně pomocí spreje na bázi alkoholu. Zabráníte tak možnosti šíření bakterií a

zajistíte maximální hygienu provozu. Aplikační hlavici nezapomeňte důkladně vysušit pomocí hadříku. Násobně tím prodloužíte její životnost.

**Může přístroj používat více osob?**

Ano. Je to možné, ale za dodržení určitých podmínek. Věnujte zvýšenou pozornost zejména dezinfekci aplikační hlavice. Zabráníte přenosu bakterií či případně kožních chorob. Pro dezinfekci použijte ideálně alkoholový roztok ve spreji. Povrch aplikační hlavice vždy důkladně osušte.

**V jakém stavu by se měla pleť v oblasti obličeje, krku nebo dekoltu nacházet těsně před použitím radiofrekvence?**

Pokožka by měla být co nejvíce čistá. Zbavena makeupu a všech povrchových nečistot. Pokud máte možnost, doporučujeme pleť vyčistit přístrojově pomocí rotačního kartáčku nebo ultrazvukové špachtle. Určitě bychom doporučili vyhnout se čištění pleti pomocí diamantové mikrodermabraze. Mechanická abraze pleti způsobí mírné podráždění pleti a následné použití radiofrekvence nedoporučujeme.

**Jaké přípravky je vhodné aplikovat bezprostředně po ošetření pleti radiofrekvencí?**

Pleť je třeba po použití přístroje Bodyface Ultimate dostatečně hydratovat. Doporučujeme použít běžný hydratační krém. Pleť potřebuje dostatečný přísun vláhy pro její regeneraci. Minimálně v den přístrojového ošetření je vhodné se vyhnout kosmetickým procedurám, jako např. hloubkové čištění pleti diamantovou mikrodermabrazí nebo zahřátí pleti horkou párou. Po ošetření radiofrekvencí je pleť mírně podrážděna a může zčervenat. Pleť potřebuje po stimulaci radiofrekvencí určitý čas pro následnou regeneraci.

**Jaké výsledky mohou očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleť projeví?**

Účinek radiofrekvence je velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. Zarudnutí pleti po ošetření je běžný průvodní jev. Pokožka je po skončení ošetření na povrchu teplejší. V následujících dnech dochází postupně k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za kvalitu pružnosti pleti. Neinvazivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces s definitivním efektem. Pleť je třeba pravidelně stimulovat (přibližně 2x až 4x do měsíce). Další přístrojové ošetření stejné partie doporučujeme minimálně za 7 až 10 dní.

**Jakým způsobem je možné působení radiofrekvence vnímat?**

Při kontaktu aplikační hlavice s pleťí proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis radiofrekvenční vlny. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přesné zacílení do vrstvy dermis o specifické frekvenci a výkonu.

**Může aplikační hlavice povrch pleti poranit?**

Při nesprávném použití přístroje může. Rozsah nastavení výkonu je záměrně upraven tak, aby byl schopen ošetřit celé spektrum uživatelů s různou citlivostí pleti a různou vrstvou tukové tkáně. Můžeme tedy považovat výkon přístroje za mírně „predimenzovaný“. Jedna z hlavních výhod přístroje je flexibilita použití se zaměřením a vybrané partie těla. Úprava dávkování výkonu umožňuje ošetření i velmi citlivých partií. Vyšší výkon nakopat pro větší plochy, kde je míra citlivosti na nižší úrovni. Estetický přístroj musí být schopen nabídnout dostatečný potenciál výkonu. V opačném případě by nebylo možné provést lifting pleti s vysokou efektivitou. Při dávkování výkonu je třeba vždy postupovat s maximální opatrností.

**Jak použití aplikačních hlavice vzájemně kombinovat?**

V obecné rovině funguje stimulace tukové tkáně následovně. Tukovou tkáň na vybraných částech těla je třeba nastimulovat vhodnou technologií, aby tukové buňky uvolnili uloženou energii. K tomu se využívá hlavice s radiofrekvencí. Uvolněná energie se dostane do krevního řečiště. Energii následně játra metabolizují. Mluvíme zde o procesu lipolýzy, který probíhá v našem těle například při sportu, kdy tělo po spálení cukru v krvi začne brát energii z tukových zásob. Proto se po ošetření těla ultrazvukovou kavitací používá následně vakuová drenážní hlavice. Lokálně tím podpoříte činnost lymfatického systému. Z tohoto pohledu nedává příliš smysl pořadí vakuum + ultrazvuk, ale naopak. Ultrazvuk + vakuum.

Radiofrekvence je skvělá technologie. Nastavenou frekvencí dokáže velmi efektivně zacílit na vrstvu pleti dermis, kde jsou alokované kolagenní a elastická vlákna. Jejich množství a kvalita má přímý vliv na pružnost pleti. Estetické ošetření tukové tkáně není jenom o zaměření se na stimulaci tukových buněk. Je to také nízká kondice pružnosti pleti, které jsou jednou z hlavních vizuálních projevů celulitidy. Proto je dobré při ošetření vybraných partií klást důraz i na technologii, která podpoří tvorbu kolagenu v dané oblasti.

Vy samozřejmě nemusíte vždy hned kombinovat vše při jednom "sezení", ale i můžete. Není to nic proti ničemu. Je to jen v ten moment časově náročnější.

Pokusíme se uvést příklad do praxe. V daný den se rozhodnu, že se zaměřím na oblast stehen. Krátký postup v bodech:

- Aplikuji gel na jednu nohu + použiji hlavici s radiofrekvencí.
- Stejným způsobem ošetřím druhou nohu. Pro každou nohu v délce 5 minut (pro každou nohu 5min + 5 minut).
- Doplníte sonogel a použijete hlavici s ultrazvukem. Každou nohu v délce do 10 minut (pro každou nohu 10 + 10 minut).
- Setřete zbytky sonogelu. Nanesete masážní olejíček a obě nohy rozmasírujete vakuovou hlavici. Každou nohu v délce 5 minut (pro každou nohu 5 + 5 minut).
- Pokud máte možnost (není vždy nezbytně nutné), je skvělé si udělat menší procházku, kdy zvolíte rychlejší chůzi. Ještě více tím podpoříte lymfatický systém těla, což je náš cíl.

Další použití ultrazvuku na těle je doporučeno za dalších 7 až 10 dní.

Použití vakuové hlavice si můžete dopřát klidně 3x do týdne. Vakuum je velmi prospěšné pro mechanické rozmasírování partií, kde se kumuluje více tukové tkáně, což má v konečném důsledku vliv na průvodní jev zvaný jako "pomeračková" pokožka. S věkem už lymfatický systém těla pracuje pomaleji a vakuová hlavice je skvělé řešení, jak jeho činnost podpořit.

Sólo technologii radiofrekvence také použít s časovým rozestupem 7 až 10 dní. Po ošetření v průběhu následujících dní probíhá proces remodelace, kdy se vrstva dermis - která načerpala radiofrekvenční energii - postupně regeneruje.

Samozřejmě ve volných dnech mezi ošetřením vybraných partií těla můžete bez problémů použít hlavici s radiofrekvencí na oblast obličeje.



**Jak je to se stimulací strií a drobných jizviček?**

Útvary vystouplé nad povrch okolní pokožky v podobě strií nebo jizviček představují nepříjemný estetický prvek. Strie a jizvy není nikdy možné úplně odstranit. Přesto je praxí prokázáno, že pravidelná stimulace pomocí radiofrekvenčních vln má pozitivní vliv na zmírnění výraznosti. Radiofrekvenční vlny nabízí dostatečný výkonnostní rozsah, aby způsobily jejich zvláchnění a změkčení této tkáně. Z tohoto pohledu je to skutečně běh na dlouhou trať a ne vždy se podaří docílit naprosto dokonalého výsledku podle vašich představ.

**U přístroje uvádíte komerční i domácí použití. Nevylučují se tyto dvě možnosti použití navzájem?**

Kvalitu estetického přístroje měříme podle účinnosti působení konkrétní technologie a možný rozsah nastavení výkonu. Užitečnou hodnotu přístroje je třeba posuzovat zejména podle toho, jakým způsobem a s jakou efektivitou lze docílit požadovaných výsledků ošetření pleti. Druhým aspektem je životnost přístroje. Při komerčním provozu podléhá přístroj násobně větší zátěži ve srovnání s používáním jednou osobou v domácích podmínkách. Nároky na životnost a konstrukci přístroje jsou při komerčním použití mnohem přísnější. Z tohoto pohledu vyhovuje model BEAUTYRELAX BODYFACE ULTIMATE ve všech aspektech. (1) velmi účinná technologie a (2) kvalitní komponenty zajišťující dlouhou životnost při vysoké frekvenci provozu. Přístroj tak splňuje požadavky pro používání doma nebo v kosmetickém salonu.

**Je přístroj zdravotnický prostředek?**

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních přístrojů. Přístroj neléčí obezitu nebo jakékoliv jiné onemocnění. Přístroj nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají v redukci podkožního tuku, potlačení projevů celulitidy a zvýšení pružnosti pleti.

**Má přístroj nějakou certifikaci?**

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. Aby pro vás bylo používání přístroje maximálně bezpečné, dbejte pečlivě všech pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

**Je přístroj vodotěsný?**

Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod tekoucí vodou.



737 196 160

mh@santadria.cz

shop.beautyrelax.cz

www.beautyrelax.cz

facebook.com/BeautyRelaxEquipment



**Martin Hrbek**  
odborný konzultant

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

SANTADRIA s.r.o. Mojžírovo nám. 75/2 Brno 61200 Brno 61200 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454



# **ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU**

## **1. ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ**

- Odstranění sonogelu/nanášeného přípravku.
- Hlavici otřete měkkým, suchým ubrouskem (např. mikrovlákno) nebo vatičkou.
- Pokud je gel zaschlý, můžete použít vlhčený ubrousek bez alkoholu (určený pro elektroniku).

## **2. DEZINFEKCE (POKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ VÍCE OSOB)**

### Postup dezinfekce:

- Nastříkejte isopropylalkohol (70–80%) ve spreji na hadřík (NE přímo na hlavici!).
- Jemnými pohyby otřete povrch hlavice.
- Nechte zcela vyschnout (alkohol se rychle odpaří).

*Pozor! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (aceton, čpavek, chlor).*

## **3. OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ**

- Hlavici NENAMÁČEJTE – voda by mohla poškodit elektroniku.
- Po čištění vždy důkladně osušte suchým hadříkem.

## **4. DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA**

- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, aplikujte na kovové části hlavice tenkou vrstvu antiseptického přípravku (např. lékařský alkohol), aby nedošlo k oxidaci.
- Skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

## **5. UPOZORNĚNÍ**

- Neponořujte hlavici do vody ani čisticích roztoků!
- Nepoužívejte abrazivní materiály (kartáče, drátěnky)!
- Nepoužívejte horkou vodu nebo páru!

## **DOPORUČENÍ PRO PRODLUŽENÍ ŽIVOTNOSTI**

- Čistěte hlavici ihned po použití – zabráníte zasychání gelu.
- Při dezinfekci používejte pouze isopropylalkohol – nepoškozuje materiály.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození (praskliny, koroze).

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## EU DISTRIBUTOR

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

beautyrelax

PO - PÁ 11:00 - 18:00  
**(420) 737 196 160**

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

## Estetický multifunkční přístroj BODYFACE ULTIMATE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-1960**

**EAN 8594166118706**

**je ve shodě s následujícími evropskými normami:**

**EN 60601-1-2:2007 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009**

**EN 61000-3-3:2008 EN 60601-1:2006**

### **Produkt není zdravotnický prostředek.**

Není určen k léčbě žádného onemocnění.

Slouží pro sportovní rekondiční masáž za účelem uvolnění svalů na vybraných částech těla.

Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů - TARIC 90191010

Při komerčním použití je třeba klást důraz na hygienu provozu přístroje.

### **Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.4.2021

**SANTADRIA** s.r.o.  
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno  
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel