

NÁVOD K OBSLUZE

BeautyRelax BR-1960

BODYFACE ULTIMATE



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
SLOVO ÚVODEM	5
UPOZORNĚNÍ	6
POUŽITÍ SONOGELU	7
ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	7
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	7
KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT	8
LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK	9
HLAVNÍ VÝHODY	12
VLASTNOSTI PŘÍSTROJE	12
3 RŮZNÉ APLIKAČNÍ HLAVICE	12
OBSAH BALENÍ	12
URČENO PRO VŠECHNY TYPY POSTAV	13
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	14
METODY REDUKCE VRÁSEK	14
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	15
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	16
RADIOFREKVENCE	17
VAKUOVÉ NASÁVÁNÍ	18
RADIOFREKVENCE	19
ULTRAZVUK	19
POPIS PŘÍSTROJE	20
POPIS DISPLEJE - ULTRAZVUKOVÉ VLNY	26
POPIS DISPLEJE - RADIOFREKVENCE	27
POPIS DISPLEJE - VAKUOVÉ SÁNÍ	28
INSTALACE PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE	29
INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁK	30
INSTALACE PŘÍSTROJE - FILTRAČNÍ TAMPÓNEK	31
INSTALACE PŘÍSTROJE - VÝMĚNA POJISTKY	32
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ULTRAZVUK	33
NASTAVENÍ INTENZITY/FREKVENCE ULTRAZVUKU	35

OBSAH:

ČAS APLIKACE - ULTRAZVUK	36
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	37
UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - ULTRAZVUK	38
UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - VAKUOVÉ SÁNÍ	45
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - VAKUOVÉ SÁNÍ	47
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE – RADIOFREKVENCE	48
ČAS APLIKACE - RADIOFREKVENCE	50
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	51
METODA APLIKACE OBLIČEJE KRKU DEKOLTU	53
MAPA CITLIVOSTI PLETI	56
BEAUTYRELAX VIDEO NA YOUTUBE	57
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	58
ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU	62
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	64
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	65
CERTIFIKACE	65
EU DISTRIBUTOR	65
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	66

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – estetické přístroje pro domácí péči i profesionální provozy

BeautyRelax je česká značka zaměřená na vývoj a distribuci estetických přístrojů určených pro široké spektrum uživatelů. Od roku 2010 přinášíme řešení, která nacházejí uplatnění jak v domácí péči, tak v kosmetických salonech, wellness centrech a dalších profesionálních provozech. Díky širokému sortimentu si u nás může vybrat každý – od běžných uživatelů hledajících komfortní péči v domácím prostředí až po profesionály, kteří potřebují spolehlivé přístroje pro každodenní práci.

Jeden sortiment, mnoho možností využití

Přístroje BeautyRelax jsou navrženy s ohledem na různé úrovně zkušeností i rozdílné nároky na provoz. Nabídka zahrnuje jednodušší modely vhodné pro domácí použití i technicky pokročilejší zařízení určená pro profesionální prostředí.

Použité technologie vycházejí z běžně využívaných postupů v oblasti estetické péče, například:

- Radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud

Každý produkt je určen k používání v souladu s návodem výrobce a platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Pro domácí uživatele

Pro jednotlivce, kteří preferují péči v pohodlí domova, nabízí BeautyRelax přístroje:

- s jednoduchým ovládáním
- určené pro pravidelné osobní použití
- umožňující přizpůsobit péči individuálním potřebám

Domácí přístroje jsou navrženy tak, aby se mohly stát součástí běžné rutiny péče o pleť, tělo nebo vlasy.

Pro salony a profesionální provozy

Pro kosmetická studia, salony a wellness zařízení je v nabídce řada přístrojů:

- vhodných pro častější provoz
- s širšími možnostmi nastavení
- určených pro profesionální použití

Profesionální uživatelé mohou vybírat zařízení podle zaměření provozu, typu poskytovaných služeb a individuálních preferencí.

Přehled kategorií přístrojů

- **Kosmetické přístroje** – určené k péči o vzhled a komfort pleti
- **Přístroje pro péči o tělo** – zaměřené na estetickou péči o postavu
- **Masážní přístroje** – vhodné pro relaxaci a regeneraci
- **IPL přístroje** – určené k dlouhodobému omezení růstu chloupků při pravidelném používání

Výběr konkrétního přístroje vždy závisí na individuálních potřebách, zkušenostech uživatele a způsobu použití.

Každý si vybere to své

Ať už hledáte přístroj pro osobní péči doma, nebo zařízení pro profesionální salon, BeautyRelax nabízí široké spektrum možností. Díky rozmanité nabídce modelů, rozdílným technickým parametrům a různým úrovním obsluhy si u nás najde řešení každý uživatel. Rádi vám pomůžeme s výběrem přístroje, který bude odpovídat vašim požadavkům i plánovanému využití.

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení produktu BeautyRelax. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům a upozorněním. Přístroj používejte výhradně v souladu s uvedenými instrukcemi a doporučeními výrobce. Dodržování pokynů v tomto návodu přispívá k bezpečnému používání přístroje a jeho správné funkci. Tento návod slouží k seznámení s funkcemi přístroje a doporučeným způsobem jeho používání.

Obecná upozornění

Instrukce uvedené v tomto návodu berte prosím s náležitou vážností. Přístroj je určen pro estetickou a masážní péči a pracuje s technologiemi využívanými v oblasti neinvazivní estetické aplikace. Přístroj není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci jakýchkoli onemocnění.

Přístroj pracuje s regulovatelným výkonem. Intenzitu vždy nastavujte s ohledem na vlastní komfort a doporučení uvedená v návodu. Nepřekračujte doporučené hodnoty ani četnost použití.

Důležité informace o přístroji a jeho použití

- Estetický přístroj BeautyRelax je zařazen do kategorie masážních a estetických přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek** ve smyslu platné legislativy. Přístroj není určen k léčbě obezity, kožních onemocnění ani jiných zdravotních stavů.
- Přístroj je určen k **neinvazivnímu použití**, což znamená, že během aplikace nedochází k porušení integrity pokožky ani k pronikání aplikačních částí pod kůži.
- Přístroj splňuje požadavky platných technických a bezpečnostních norem vztahujících se na tento typ zařízení.
- Při používání přístroje je nutné aplikovat **vodivý gel (sonogel)** určený pro kosmetické nebo přístrojové použití. Gel slouží ke zlepšení kontaktu aplikační hlavičky s pokožkou a k zajištění správné funkce přístroje.
- Používejte přístroj pouze v doporučených intervalech. Častější nebo delší používání, než je uvedeno v návodu, **nezvyšuje účinnost** a může vést k nežádoucím reakcím pokožky.
- Výsledky používání se mohou lišit v závislosti na individuálních vlastnostech pokožky, způsobu použití a dodržování návodu k obsluze.

Podpora a dotazy

V případě nejasností, dotazů nebo pochybností ohledně používání přístroje se obraťte na naši zákaznickou podporu:

- Telefon: +420 737 196 160
- E-mail: mh@santadria.cz

Rádi vám poskytneme doplňující informace k obsluze přístroje.

Tento návod si pečlivě uschovejte pro případné pozdější použití.

Přejeme vám, aby vám přístroj BeautyRelax dobře sloužil při jeho používání v souladu s tímto návodem.

Tým BeautyRelax.cz

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, seznámete se se všemi vyobrazeními a návod si uschovejte pro případné pozdější použití.
- Nepoužívejte přístroj na pokožce postižené závažným kožním onemocněním, otevřenými ranami nebo podrážděním. V případě pochybností o vhodnosti používání přístroje doporučujeme konzultaci s lékařem.
- Pokud je přístroj používán více osobami, je nutné dodržovat zvýšené hygienické standardy. Po každém použití je třeba aplikační hlavice očistit a dezinfikovat vhodným prostředkem určeným pro povrchy přicházející do styku s pokožkou.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je mechanicky poškozený, nefunguje správně nebo byl vystaven působení vody.
- V případě poškození přístroje se nedotýkejte jeho vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj spadne na zem, může dojít k jeho poškození. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí (např. koupelna, sprcha, bazén).
- Přístroj není vodotěsný ani omyvatelný. Nesmí být ponořen do vody ani čištěn pod tekoucí vodou.
- Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Po každém použití jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě, pokud je to relevantní.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny, aby se zabránilo vzniku kondenzace.
- Přístroj není určen k používání dětmi ani osobami, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti neumožňují bezpečné používání bez dozoru.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na zdrojích tepla nebo v jejich bezprostřední blízkosti (např. radiátory, kamna, otevřený oheň).
- Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat, upravovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém a čistém prostředí, chráněném před prachem a vlhkostí.
- Během používání přístroj žádným způsobem nezakrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám.
- Distributor nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v rozporu s tímto návodem k obsluze nebo bezpečnostními pokyny.
- Za škody na zdraví nebo majetku vzniklé v důsledku jiného než určeného způsobu použití přístroje nenese distributor odpovědnost v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny a radiofrekvence se tak mohou na pleť lépe navázat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.



ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK

- Hlava
- Krk (přední i zadní strana)
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Locket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK

- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Stehna
- Zadeček
- Lýtka



Poznámka: párová oblast těla je brána jako jedna partie

KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT

Použití přístroje **není možné** u osob s těmito stavy:

- těhotenství
- nádorové onemocnění (aktuální nebo v anamnéze)
- kardiovaskulární onemocnění (včetně závažných srdečních onemocnění)
- implantovaný kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát
- epilepsie
- závažné poruchy nervového systému
- závažné poruchy imunitního systému
- žilní trombóza
- závažné poruchy krevního oběhu
- závažné poruchy srážlivosti krve
- těžká cukrovka (diabetes mellitus v závažném stadiu)
- závažné onemocnění jater nebo ledvin
- velmi vysoké hodnoty cholesterolu
- akutní virové onemocnění
- stav vysokých horeček
- anafylaxe
- chronický únavový syndrom

- hypertyreózou
- hypotyreózou
- jinými závažnými hormonálními poruchami
- polycystickými vaječníky


- na pokožce postižené aktivním kožním onemocněním
- na otevřených ranách, zánětech nebo podrážděné pokožce
- při fotosenzitivních kožních onemocněních
- v místě výskytu kovových implantátů nebo cizích těles
(výjimku tvoří zubní náhrady)

- u osob pod vlivem alkoholu nebo návykových látek
- u osob vyžadujících trvalý dohled
- během menstruace
- u osob, které nejsou schopny bezpečně vnímat průběh aplikace

V případě jakýchkoli pochybností o zdravotním stavu uživatele nebo vhodnosti použití přístroje **doporučujeme konzultaci s praktickým lékařem** před zahájením aplikace.


LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při používání přístroje **BeautyRelax** se snažte vyhnout oblastem lymfatických uzlin. Letmý nebo náhodný dotyk těchto oblastí nevadí, **dlouhodobou nebo opakovanou stimulaci lymfatických uzlin však nedoporučujeme**. Poloha lymfatických uzlin je znázorněna **velkými zelenými tečkami**.

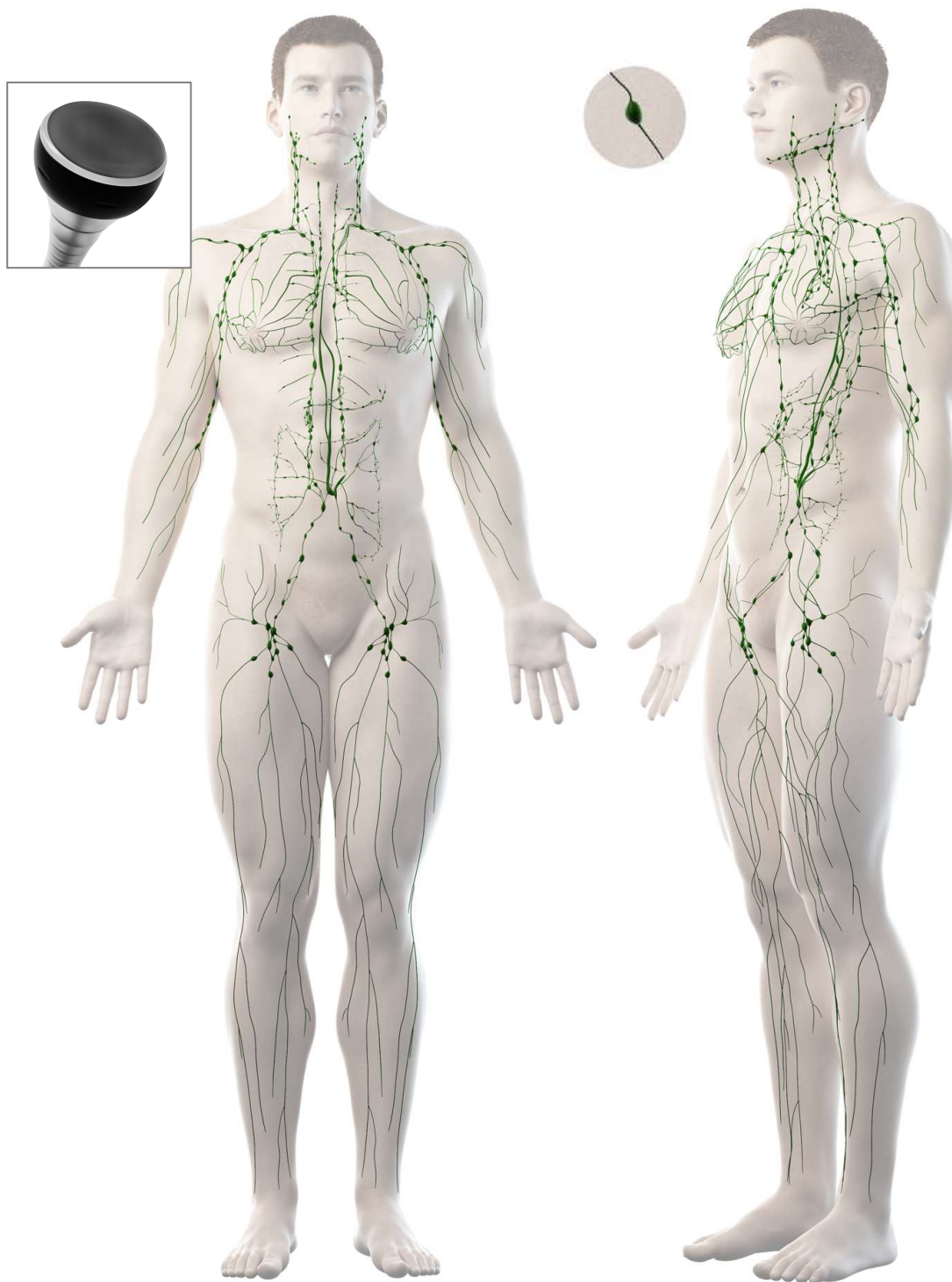

LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při používání přístroje **BeautyRelax** se snažte vyhnout oblastem lymfatických uzlin. Letmý nebo náhodný dotyk těchto oblastí nevadí, **dlouhodobou nebo opakovanou stimulaci lymfatických uzlin však nedoporučujeme**. Poloha lymfatických uzlin je znázorněna **velkými zelenými tečkami**.

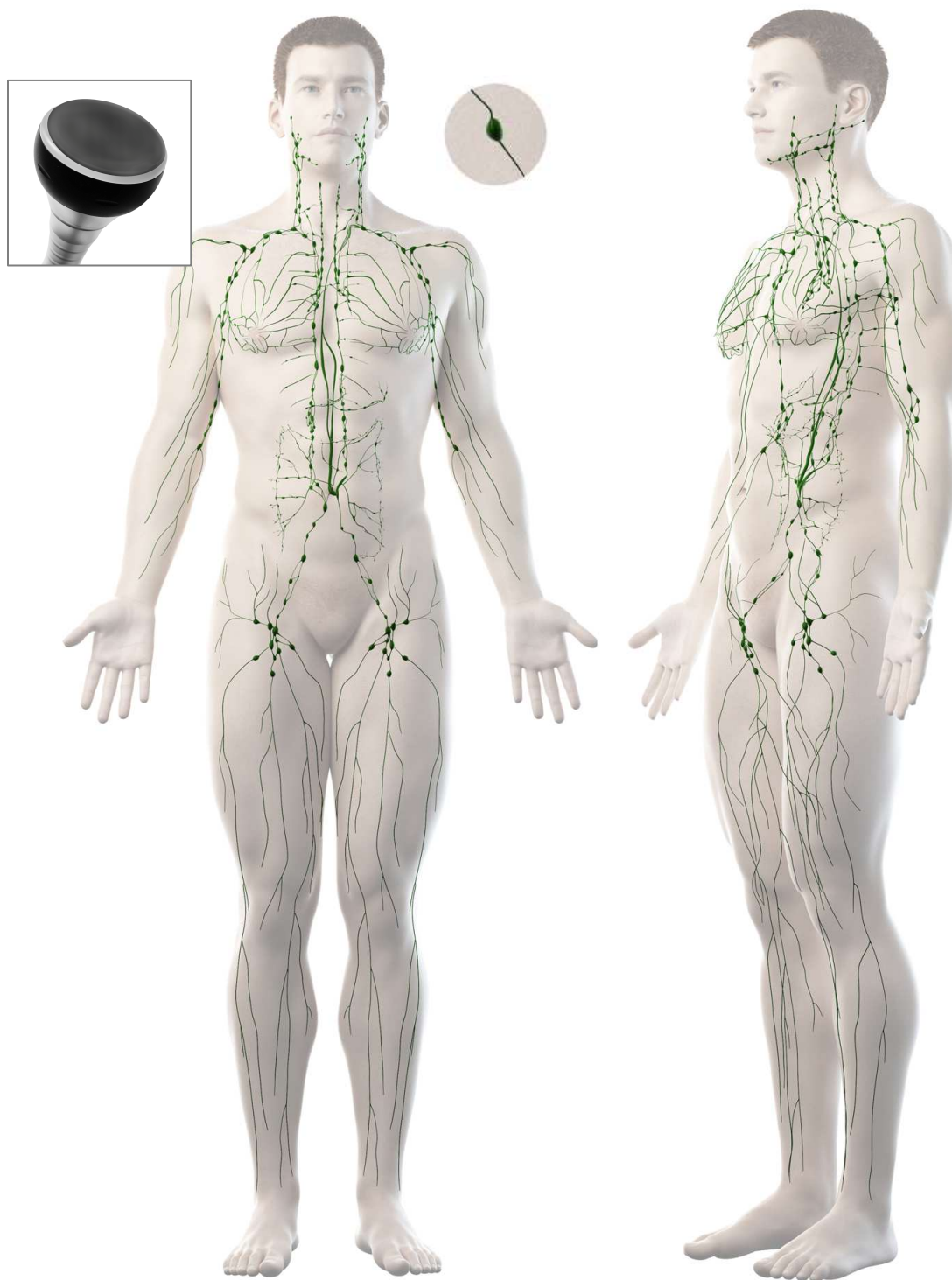

LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při používání přístroje **BeautyRelax** se snažte vyhnout oblastem lymfatických uzlin. Letmý nebo náhodný dotyk těchto oblastí nevadí, **dlouhodobou nebo opakovanou stimulaci lymfatických uzlin však nedoporučujeme**. Poloha lymfatických uzlin je znázorněna **velkými zelenými tečkami**.



HLAVNÍ VÝHODY

- Podpora hladšího a sjednocenějšího vzhledu pleti
- Přispívá k vizuálně pevnějšímu a tonizovanějšímu vzhledu kontur obličeje
- Podpora vypnutějšího vzhledu pokožky při pravidelném používání
- Působení zaměřené na zlepšení celkového dojmu struktury pokožky
- Podpora vizuálního zjemnění nerovností pokožky v oblastech se sklonem k jejich výskytu
- Přispívá k optickému zmírnění viditelnosti strií a drobných nerovností pokožky
- Podpora pocitu lehkosti a komfortu v končetinách při mechanické masáži
- Vhodné pro práci s vybranými tělesnými partiemi z hlediska jejich tvarování a vzhledu
- Neinvazivní způsob použití bez narušení povrchu pokožky
- Použití zaměřené na uživatelský komfort
- Použití je zpravidla vnímáno jako příjemné a bez výrazných nepříjemných vjemů
- Mechanická masáž určená k relaxační a estetické péči

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

- tStolní provedení vhodné pro stabilní umístění
- Kvalitní zpracování jednotlivých konstrukčních a elektronických komponentů
- Navrženo s důrazem na dlouhodobé a opakované používání
- Možnost individuálního nastavení intenzity jednotlivých funkcí
- Hlavní jednotka vybavena ovládacím panelem s barevným displejem
- Určeno pro domácí použití i provoz v kosmetických a wellness zařízeních
- Frekvence ultrazvukových vln: 40 kHz
- Frekvence radiofrekvenčních vln: 5 MHz

3 RŮZNÉ APLIKAČNÍ HLAVICE


- Podtlaková lymfatická drenáž s vakuovým nasáváním a radiofrekvencí
- Multipolární radiofrekvence
- Ultrazvuková kavitace

OBSAH BALENÍ

- Hlavní jednotka BeautyRelax BR-1960
- Aplikátor s vakuovým sáním a přídatnou funkcí radiofrekvence
Rozsah podtlaku **0 až 250Kpa**, radiofrekvence - **5Mhz**
- Aplikátor s multipolární radiofrekvencí - frekvence **5Mhz**
- Aplikátor s ultrazvukovou kavitací - frekvence **40KHz**
- Balení sonogelu 250ml
- Sada filtračních tampónků pro vakuovou hlavici a sada náhradních pojistek
- Plastový držák
- Napájecí kabel 220V
- Návod k obsluze

URČENO PRO VŠECHNY TYPY POSTAV

Používání přístroje **BeautyRelax** je vhodné pro ženy i muže bez ohledu na typ postavy nebo lokalizaci tukové tkáně. Použití je určeno osobám, které splňují podmínky uvedené v návodu k obsluze a **nevztahuje se na osoby, u nichž je uvedena některá ze stavů, kdy použití není doporučeno.**

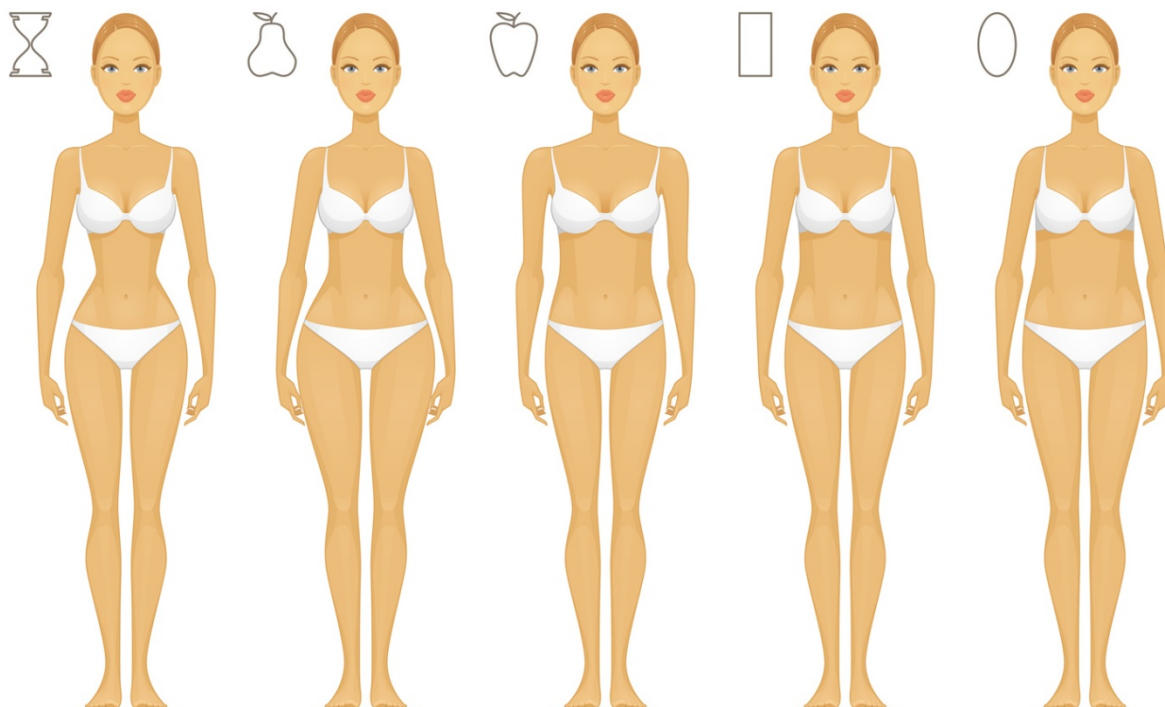

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o Vznik vrásek je přirozenou součástí procesu stárnutí pokožky. S přibývajícím věkem dochází k postupné ztrátě elasticity pleti a ke zpomalení buněčné obnovy. Tyto změny vedou ke snížení přirozené produkce kolagenu, který je klíčový pro pevnost a pružnost pokožky. V důsledku těchto procesů se na povrchu pleti objevují rýhy, které se postupně prohlubují a mohou zasahovat až do vrstvy dermis, tedy podpůrné vrstvy kůže.



Výsledkem je pleť s viditelnějšími a hlubšími vráskami. Vrásky lze rozdělit do dvou základních skupin. Dynamické vrásky vznikají opakovaným stahováním obličejových svalů a obvykle se začínají objevovat přibližně kolem 35. roku života. Statické vrásky jsou důsledkem povolení hlubších vrstev kůže a snížené tvorby kolagenu a zpravidla se objevují kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti péče o vrásky lze rozdělit na invazivní a neinvazivní. Invazivní metody zahrnují chirurgické zákroky nebo injekční aplikace, při nichž dochází k narušení povrchu pokožky. Tyto postupy jsou spojeny s vyšší zátěží pro organismus a delší dobou rekonvalescence. Neinvazivní metody zahrnují používání kosmetických přípravků, jako jsou krémy, gely, oleje nebo séra, a také přístrojové aplikace využívající technologie určené k povrchové stimulaci pokožky. Tyto technologie se zaměřují na podporu přirozených procesů v pleti, zejména stimulaci kolagenních a elastických vláken. Mezi často využívané neinvazivní technologie patří radiofrekvence, která je oblíbená pro svůj příznivý poměr mezi šetrností a estetickým efektem při pravidelném používání.

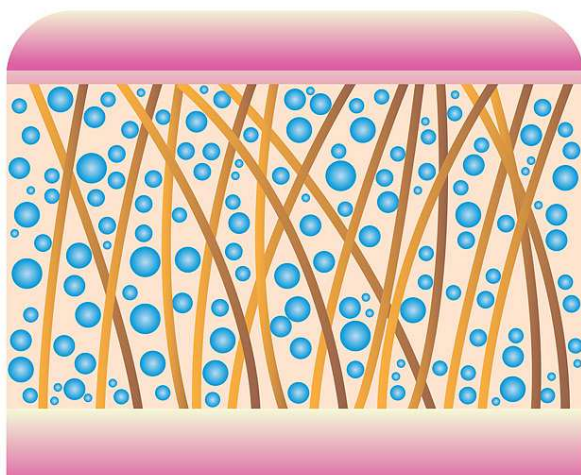

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

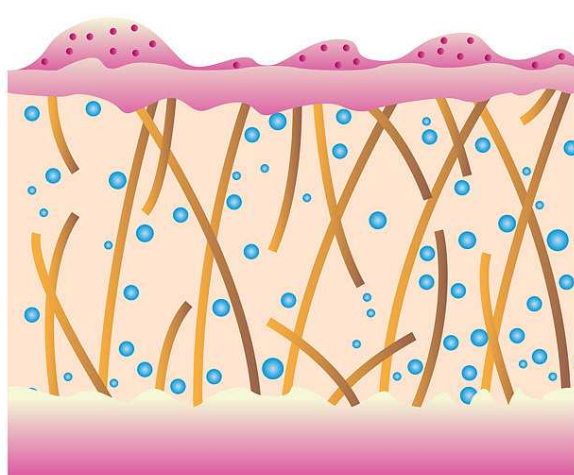

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Bodyface Ultimate je multifunkční zařízení určené pro kosmetickou, estetickou a wellness péči o celé tělo. Přístroj využívá kombinaci technologií, které jsou běžně aplikovány v rámci estetických a kosmetických procedur zaměřených na vzhled pokožky a uživatelský komfort. Zařízení nabízí mechanickou masáž s podtlakovým sáním, multipolární radiofrekvenční aplikaci a ultrazvukovou technologii určenou pro neinvazivní, povrchovou práci s vybranými tělesnými partiemi. Jednotlivé funkce jsou navrženy pro estetickou péči, podporu vizuálního dojmu pokožky a relaxační masážní použití bez narušení jejího povrchu. Použití přístroje je neinvazivní a zaměřené na komfortní kosmetickou péči, která může při pravidelném používání přispět k hladšímu, pevnějšímu a sjednocenějšímu vzhledu pokožky a k subjektivnímu pocitu uvolnění v aplikovaných oblastech. Přístroj je zpracován s důrazem na kvalitu použitých komponentů, stabilitu konstrukce a dlouhodobé používání. Nabízí možnost individuálního nastavení intenzity jednotlivých funkcí podle preferencí uživatele. Stolní provedení umožňuje snadné a bezpečné umístění v domácím prostředí i v kosmetických a wellness provozech.



ULTRAZVUKOVÉ VLNY

Přístroj pro domácí použití využívá ultrazvukovou technologii aplikovanou prostřednictvím velké aplikační hlavičky, která je určena pro neinvazivní kosmetickou a estetickou péči o vybrané tělesné partie. Ultrazvukové vlny jsou vedeny přes povrch pokožky a působí mechanicky a vibračně v oblasti měkkých tkání, aniž by docházelo k narušení povrchu pokožky. Působení ultrazvuku je v rámci estetické praxe využíváno pro práci s oblastmi se změněným vzhledem pokožky a kontur těla. Aplikace je zaměřena na podporu vizuálního sjednocení pokožky, jejího hladšího vzhledu a na estetické tvarování vybraných partií v rámci kosmetické péče. Použití přístroje je neinvazivní a zpravidla vnímáno jako komfortní, bez nutnosti omezení běžných denních aktivit. Při pravidelném používání mohou být individuálně pozorovatelné změny ve vzhledu aplikovaných oblastí, přičemž výsledný efekt se může lišit v závislosti na způsobu použití, frekvenci aplikace a individuálních vlastnostech pokožky. Ultrazvuková aplikace je určena výhradně ke kosmetickému a estetickému použití, není zdravotnickým postupem a není určena k léčbě, prevenci ani odstraňování zdravotních obtíží. Přístroj neslouží k redukci tělesné hmotnosti a nenahrazuje zdravý životní styl.



frekvence ultrazvukových vln

40KHz

RADIOFREKVENCE

Aplikační hlavice pracuje s **radiofrekvenční energií o předem nastaveném výkonu a frekvenci**, které jsou navrženy pro **kosmetickou a estetickou aplikaci**. Působení radiofrekvenčních vln vytváří **kontrolovaný zahřívací efekt na povrchu a v hlubších vrstvách pokožky**, aniž by docházelo k narušení její integrity. Tepelný efekt je využíván v rámci **neinvazivní estetické péče** a je zaměřen na **zlepšení celkového vzhledu pokožky**, její struktury a vizuálního napětí. Technologie umožňuje **rovnoměrné rozložení energie** i v oblastech s výraznější vrstvou měkkých tkání, což přispívá k **harmonizovanému a sjednocenému vzhledu aplikovaných partií**. Použití je určeno pro **kosmetické, estetické a wellness procedury**, při nichž může být při pravidelném používání **subjektivně vnímán pevnější a vypnutější vzhled kontur**. Výsledný efekt je individuální a závisí na způsobu použití, frekvenci aplikace a vlastnostech pokožky uživatele.



ČERVENÉ SVĚTLO

- Určeno pro neinvazivní kosmetickou a estetickou aplikaci
- Přispívá k podpoře celkového vzhledu pokožky při pravidelném používání
- Podpora vizuálně sjednoceného a svěžejšího vzhledu pleti
- Může přispívat k příjemnému prohřátí povrchu pokožky během aplikace
- Vhodné jako doplněk kosmetické péče zaměřené na vzhled pleti
- Použití je zaměřeno na komfort a relaxační charakter procedury
- Vlnová délka světla: 625 nm

VAKUOVÉ NASÁVÁNÍ

Vakuová masáž je v oblasti **kosmetické a wellness péče** využívána jako **mechanická stimulace povrchu pokožky a měkkých tkání**. Působení podtlaku v kombinaci s pohybem aplikační hlavice je zaměřeno na **zlepšení vizuálního vzhledu pokožky** v oblastech se sklonem k nerovnostem. Mechanické hnětení pomocí podtlaku vytváří **intenzivní masážní efekt**, který je často spojován se **subjektivním pocitem uvolnění, lehkosti a komfortu** v aplikovaných partiích. Při pravidelném používání může masáž přispívat k **optickému zjemnění struktury pokožky** a k **sjednocenějšímu vzhledu povrchu kůže**, často označovanému jako „pomorančová kůže“. Použití vakuové masáže je **neinvasivní**, probíhá bez narušení povrchu pokožky a je určeno **výhradně ke kosmetickému a relaxačnímu použití**. Výsledný efekt je individuální a závisí na způsobu použití, frekvenci aplikace a vlastnostech pokožky uživatele.



VAKUOVÉ NASÁVÁNÍ



Vakuové nasávání je v oblasti **kosmetické a wellness péče** využíváno jako **mechanická masážní technika** zaměřená na **povrchovou stimulaci pokožky a měkkých tkání**. Působení podtlaku v kombinaci s pohybem aplikační hlavice je určeno pro **zlepšení vizuálního vzhledu pokožky** v oblastech se sklonem k nerovnoměrnostem.

Masáž vytváří **rytmický masážní efekt**, který je často spojován se **subjektivním pocitem uvolnění, lehkosti a komfortu** v aplikovaných partiích. Při pravidelném používání může přispívat k **optickému zjemnění struktury pokožky** a k jejímu **sjednocenějšímu vzhledu**, běžně označovanému jako „pomerančová kůže“.

Průběh masáže

Masáž probíhá cyklicky v několika krocích:

1. **Vytvoření podtlaku a přisátí pokožky**
2. **Plynulý ruční pohyb aplikátoru po vybraných částech těla**
3. **Postupné uvolnění vytvořeného podtlaku**

Kombinace podtlaku a řízeného pohybu aplikační hlavice vytváří **intenzivní mechanickou stimulaci povrchu pokožky**, která se přirozeně přizpůsobuje tvarům těla a umožňuje **komfortní práci i na obtížněji dostupných partiích**. Použití je **neinvazivní** a určeno výhradně ke **kosmetické a relaxační péči**.



RADIOFREKVENCE

Aplikační hlavice pracuje s **radiofrekvenční energií o předem nastaveném výkonu a frekvenci**, která je navržena pro **neinvazivní kosmetickou a estetickou aplikaci**. Působení radiofrekvence vytváří **kontrolovaný zahřívací efekt** v aplikované oblasti, aniž by docházelo k narušení povrchu pokožky. Tepelný efekt je využíván v rámci **estetické péče zaměřené na vzhled pokožky**, její strukturu a vizuální napětí. Technologie umožňuje **rovnoměrné rozložení energie** i v oblastech s výraznější vrstvou měkkých tkání, což přispívá k **harmonizovanému a sjednocenému vzhledu kontur**. Použití radiofrekvence je zaměřeno na **uživatelský komfort** a při pravidelném používání může být **subjektivně vnímán pevnější a vypnutější vzhled pokožky**. Výsledný efekt je individuální a závisí na způsobu použití, frekvenci aplikace a vlastnostech pokožky uživatele.




ULTRAZVUK

Aplikační hlavice s velkou kontaktní plochou využívá **ultrazvukové vlny určené pro neinvazivní kosmetickou aplikaci** na vybrané tělesné partie. Ultrazvuk působí **mechanicky a vibračně** v oblasti měkkých tkání a je využíván v rámci **estetické péče zaměřené na vzhled pokožky a kontur těla**. Použití ultrazvuku je v kosmetické praxi spojováno s **podporou vizuálního sjednocení pokožky** a s **estetickým tvarováním vybraných partií**. Aplikace je **bez narušení povrchu pokožky**, zpravidla vnímána jako komfortní a nevyžaduje omezení běžných denních aktivit. Při pravidelném používání mohou být **individuálně pozorovatelné změny ve vzhledu aplikovaných oblastí**. Přístroj je určen **výhradně ke kosmetickému a estetickému použití**, neslouží k redukci tělesné hmotnosti ani k řešení zdravotních obtíží a nenahrazuje zdravý životní styl.

POPIS PŘÍSTROJE

Horní strana hlavní jednotky

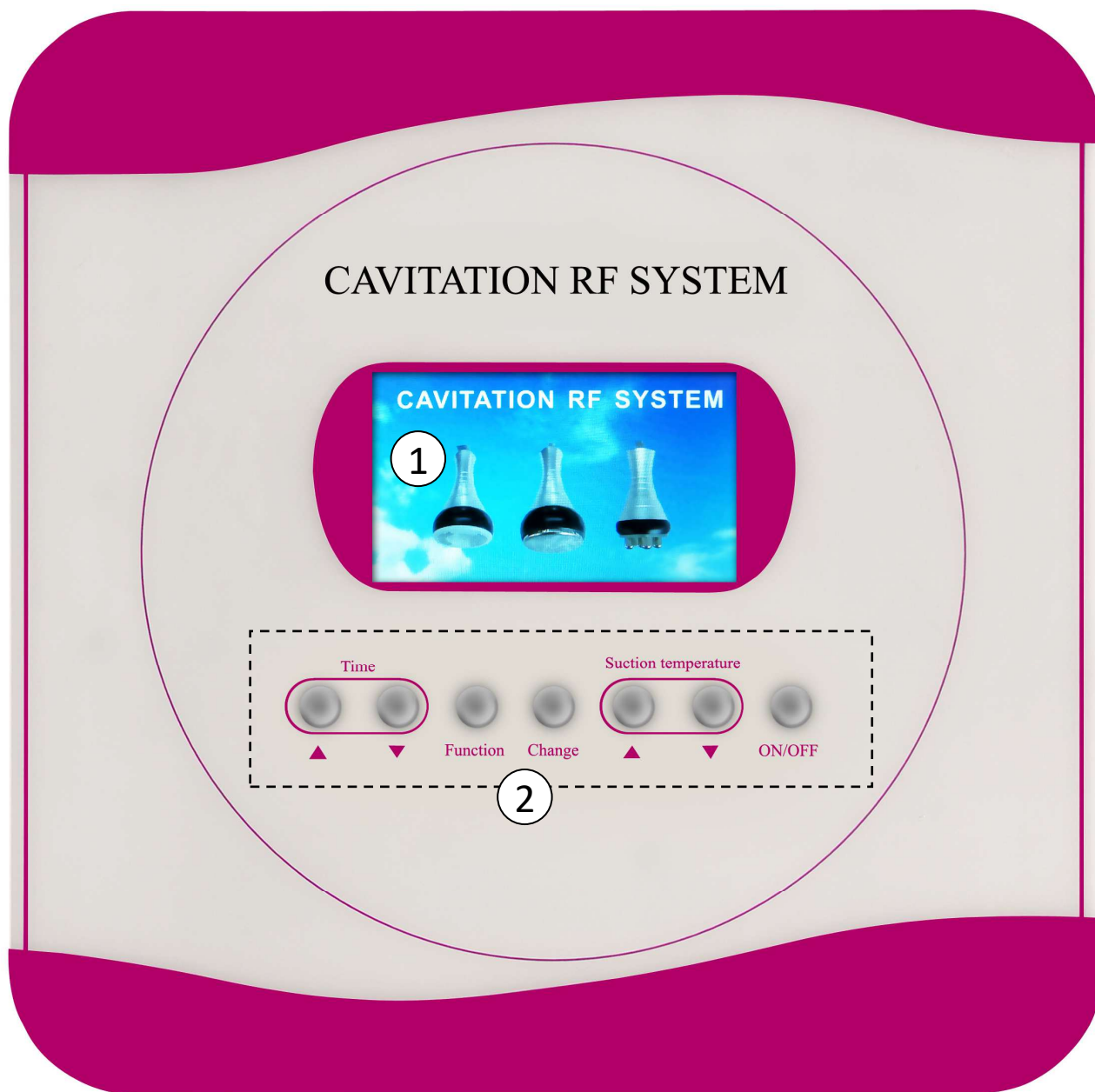


1. Displej

2. Ovládací panel

POPIS PŘÍSTROJE


Ovládací panel

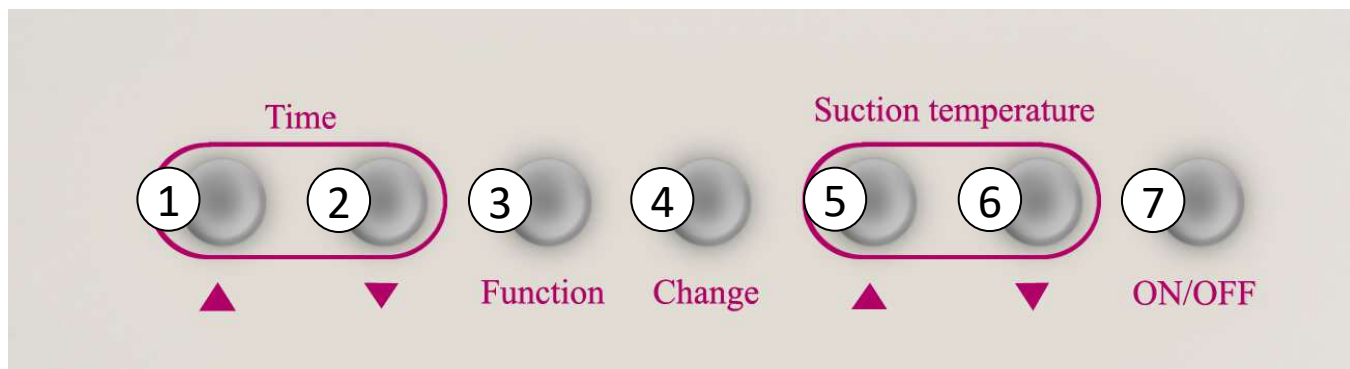

1. Tlačítko **Time** (čas) - zvýšení
2. Tlačítko **Time** (čas) - snížení
3. Tlačítko **Function** (funkce)
4. Tlačítko **Change** (změna)
5. Tlačítko **zvýšení** (podtlak/teplota)
6. Tlačítko **snížení** (podtlak/teplota)
7. Tlačítko **ON/OFF**

POPIS PŘÍSTROJE

Boční strana hlavní jednotky

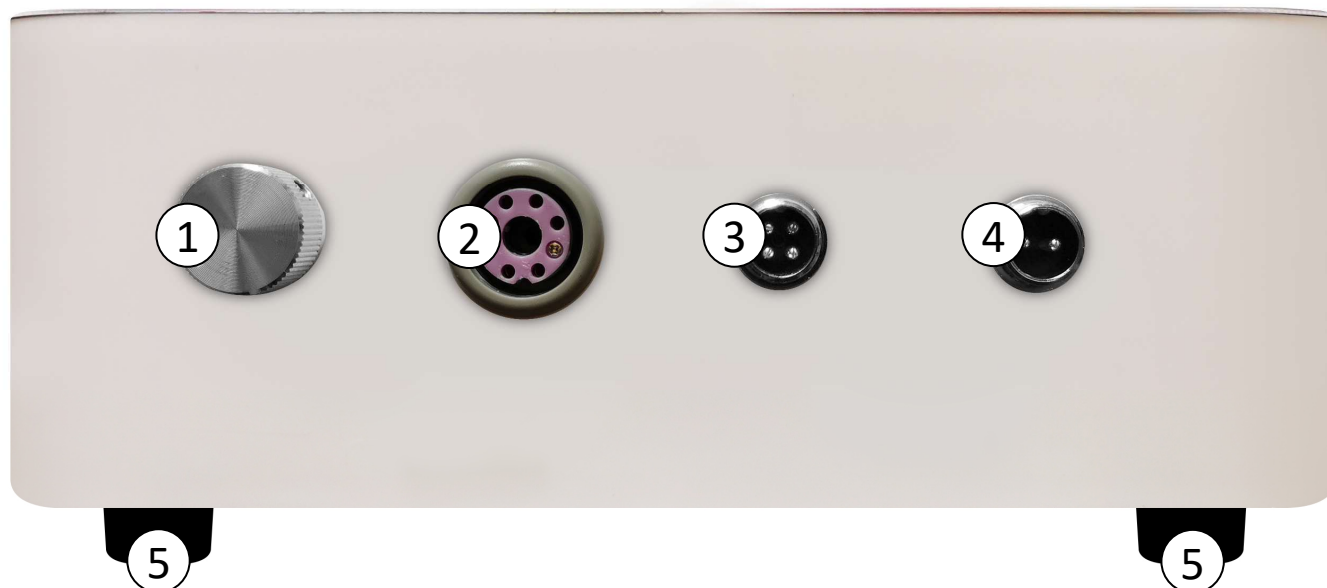

1. Otočné tlačítko - síla podtlaku

Otočení **po směru** hodinových ručiček - **zvýšení**

Otočení **proti směru** hodinových ručiček - **snížení**

2. Vstup pro kabel hlavice s vakuovým sáním


3. Vstup pro kabel hlavice s radiofrekvencí

4. Vstup pro kabel s ultrazvukem

5. Nožičky

POPIS PŘÍSTROJE

Zadní strana hlavní jednotky

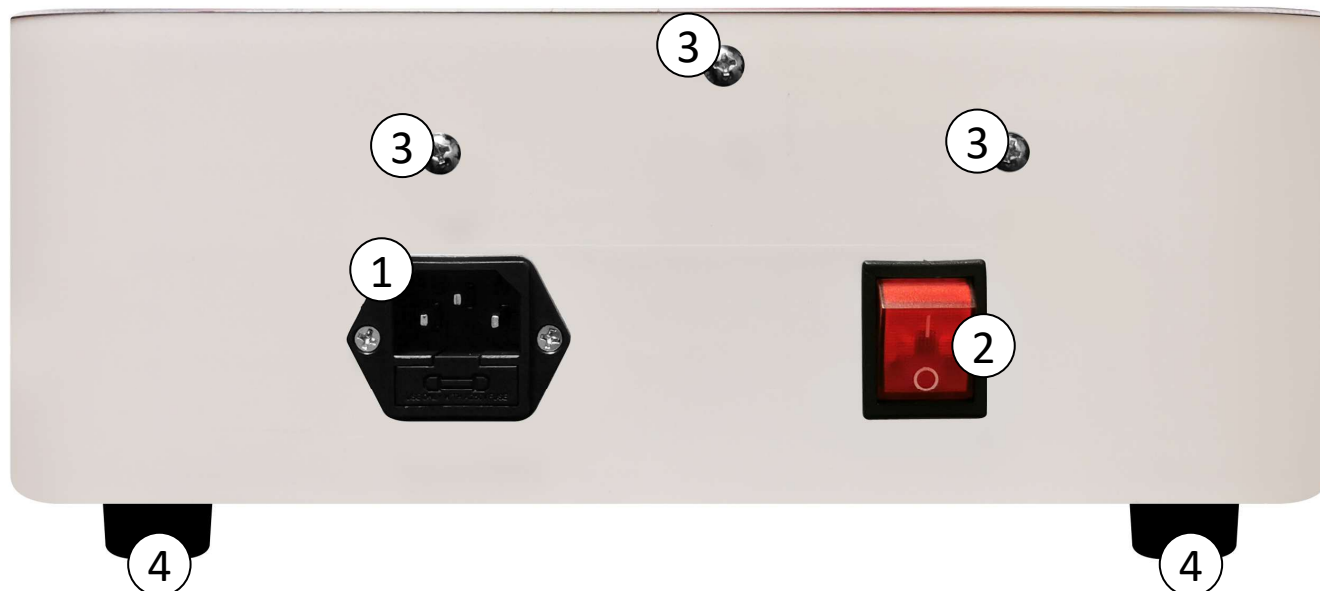

- 1. Vstup pro napájecí kabel
- 2. Hlavní tlačítko ON/OFF
- 3. Šroubky pro uchycení držáku na aplikační hlavice
- 4. Nožičky

POPIS PŘÍSTROJE

Spodní strana hlavní jednotky



1. Mřížka ventilátoru – **NESMÍ BÝT NIKDY ZAKRYTA BĚHEM PROVOZU PŘÍSTROJE**
2. Nožičky


POPIS PŘÍSTROJE

Aplikační hlavice



1. Aplikační hlavice - **ultrazvukové vlny**
2. Aplikační hlavice - **vakuové nasávání s radiofrekvencí**
3. Aplikační hlavice - **radiofrekvence**

POPIS DISPLEJE - ULTRAZVUKOVÉ VLNY

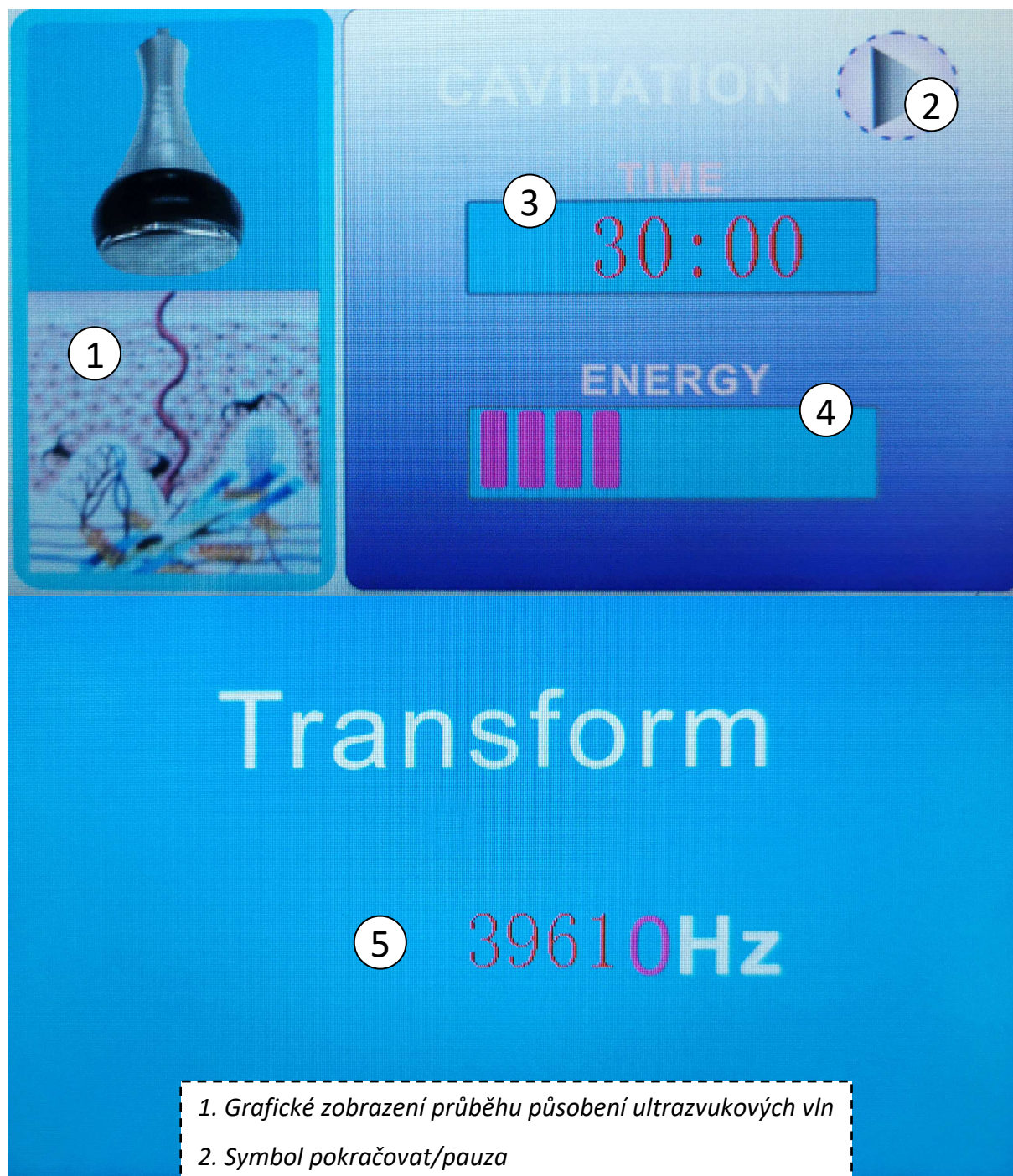


1. Grafické zobrazení průběhu působení ultrazvukových vln
2. Symbol pokračovat/pauza
3. Zobrazení času
4. Zobrazení výkonu 1 – 10
5. Nastavení frekvenčního rozsahu

POPIS DISPLEJE - RADIOFREKVENCE



- 1. Grafické zobrazení průběhu působení radiofrekvence
- 2. Symbol pokračovat/pauza
- 3. Zobrazení času
- 4. Zobrazení výkonu 1 - 10

POPIS DISPLEJE - VAKUOVÉ SÁNÍ

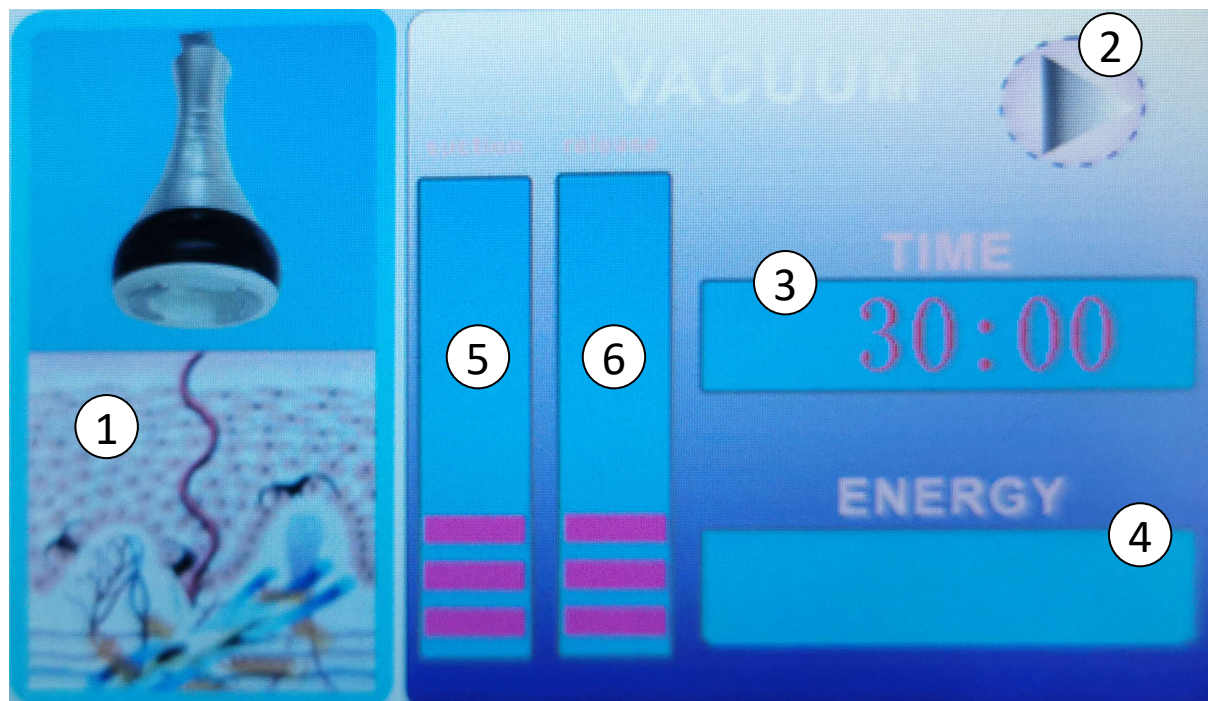

1. Grafické zobrazení průběhu působení vakuového sání
2. Symbol pokračovat/pauza
3. Zobrazení času
4. Zobrazení výkonu radiofrekvence 1 – 10
5. Čas vytváření podtlaku
6. Čas uvolnění podtlaku

INSTALACE PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE

Připojte k hlavní jednotce všechny tři aplikační hlavice. Vstupy se nachází na boční straně hlavní jednotky. **Vždy dbejte na to, aby byl konektor správně zapojen do zdířky ve správném úhlu. Konektor má přesně daný úhel, pod kterým ho lze zapojit do zdířky.** Úhel je dán vykrojenou plochou, která přesně zapadne.



Konektor aplikační hlavice radiofrekvence a ultrazvukových vln mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. **Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.**

INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁK

Součástí balení je průhledný držák. Slouží pro uchycení aplikačních hlavice. Držák připevněte jednoduše k hlavní jednotce pomocí šroubků, které jsou v závitech již umístěny. Šroubky odšroubujte, přiložte držák a zpět zašroubujte. Použijte křížový šroubovák. **Šroubky neutahujte příliš velkou silou. Mohlo by dojít k prasknutí plastového držáku.** Může se stát, že bude třeba šroubky po nějakém čase znovu dotáhnout.



INSTALACE PŘÍSTROJE - FILTRAČNÍ TAMPÓNEK


Hlavice s vakuovým sáním je vybavena filtračním tampónkem. Vytváří nezbytnou ochranu před vniknutím nečistot nebo částic kontaktního gelu dovnitř podtlakového systému. Postup výměny filtračního tampónku je následující:

1. Na spodku vnitřní strany aplikační hlavice je umístěna bílá gumová čepička.
2. Gumovou čepičku odstraňte. Dostanete se tak do nejspodnějšího místa vakuové hlavice.
3. Vložte filtrační tampónek.
4. Vraťte nazpět gumovou čepičku na své místo zatlačením.
5. Ujistěte se, že je bílá gumová čepička umístěná nadoraz.
6. Doporučujeme ověřit stav filtračního tampónku po každém přibližně desátém použití hlavice s vakuovým sáním. Pokud je výrazně zasažen vlhkostí, je špinavý nebo je pokrčený, což je v rozporu s jeho funkcí, vyměňte jej za nový. Několik kusů filtračních tampónků je součástí balení. Pokud budete potřebovat nové balení, kontaktujte prosím prodejce/distributora.




INSTALACE PŘÍSTROJE - VÝMĚNA POJISTKY

Přístroj je vybaven pojistkou. Slouží jako ochrana přístroje v případech, kdy by ve vaší elektrické síti došlo nedopatřením k přepětí. Pojistka nedovolí při vyšším napětí, aby proniklo do elektroniky přístroje, což by vedlo k fatálnímu poškození. Pojistku je v tomto případě nezbytné vyměnit za novou.

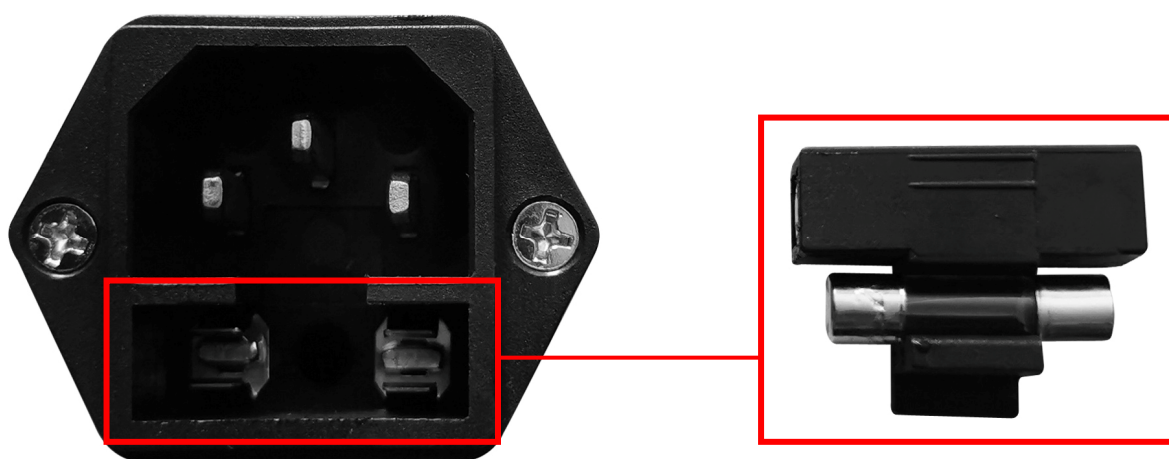

Pojistka je umístěna na konci plastové konzole. V držáku je prostor pro jednu náhradní pojistku.

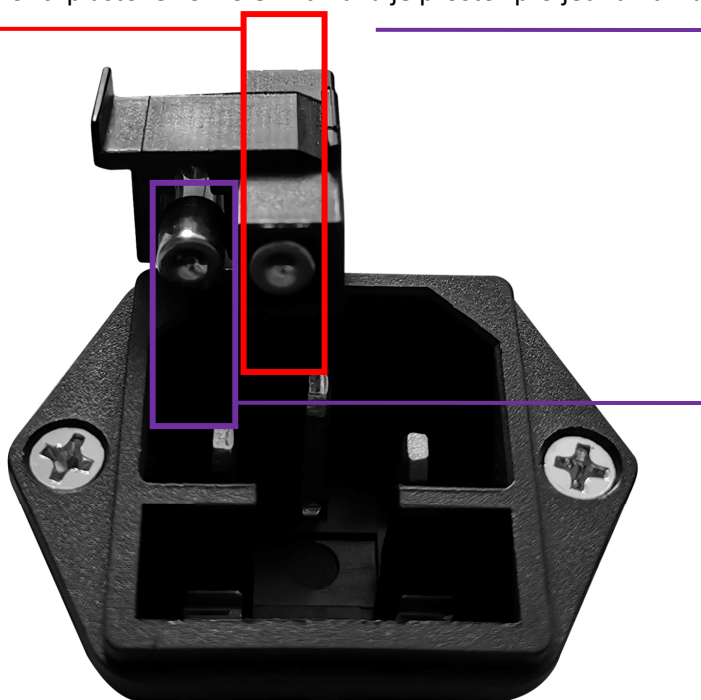



Pokud je přístroj připojen k napájecímu kabelu, ale přesto nefunguje, vždy zkontrolujte pojistku a případně ji vyměňte za novou. Pokud budete potřebovat nové náhradní pojistky, kontaktujte prosím prodejce/distributora.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - ULTRAZVUK

1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje.
Poloha 1 – zapnuto. Tlačítko se rozsvítí. Přístroj se nachází v pohotovostním režimu - displej se aktivuje a zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.




2. Pomocí tlačítka **Function** zvolte program **CAVITATION**.

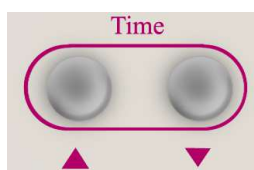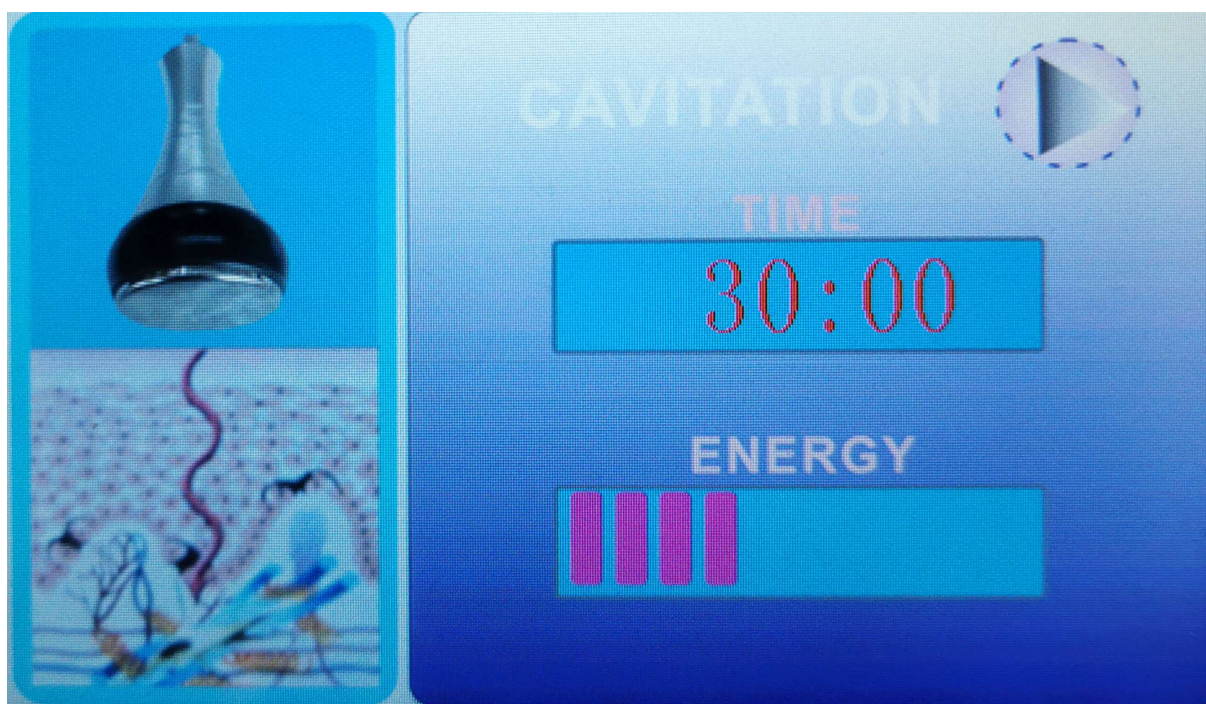


3. Pomocí tlačítka   si můžete nastavit čas aplikace v rozsahu od 1 do 60 minut.

4. Pomocí tlačítka  si můžete nastavit frekvenci ultrazvukových vln. Pomocí tlačítka

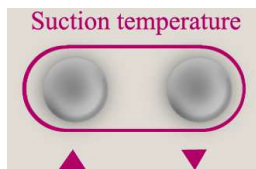

zvýšíte nebo snížíte hodnotu frekvence. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení výběru.

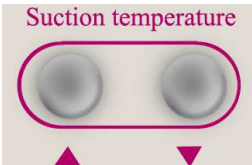5. Pomocí tlačítka  si můžete nastavit výkon ultrazvuku. Rozsah nastavení je od hodnoty 1 až 10. Vždy začínejte od hodnoty 1 a přidávejte pomalu se zvýšenou opatrností.

6. Pomocí tlačítka  zahájíte aplikaci pomocí ultrazvukových vln. Aplikační hlavice nyní generuje ultrazvukové vlny. Průběh aplikace zobrazuje animace na levé straně displeje.

7. Pomocí tlačítka  můžete aplikaci kdykoliv přerušit a znovu pokračovat.


8. Pomocí tlačítka  můžete kdykoliv změnit režim aplikace.

9. Po uplynutí času se přístroj navrátí zpět do pohotovostního režimu. Displej zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.

10. Zvolte pomocí tlačítka  další režim aplikace nebo přístroj vypněte pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 0 – vypnuto. Tlačítko zhasne. Displej se vypne.

NASTAVENÍ INTENZITY/FREKVENCE ULTRAZVUKU

Každé tělo je originál. Na různých částech těla máme různě silnou tukovou tkáň. S ohledem na odlišnost tukové tkáně je třeba pracovat s výkonem přístroje. Při vývoji estetického přístroje BeautyRelax BR-1960 byl kladen velký důraz na univerzálnost používání. Dávkování intenzity a frekvence ultrazvuku umožňuje použití přístroje každému, kdo splňuje podmínky použití a netýká se ho žádný stav uvedený v seznamu kontraindikací. Na ovládacím panelu si můžete nastavit frekvenci

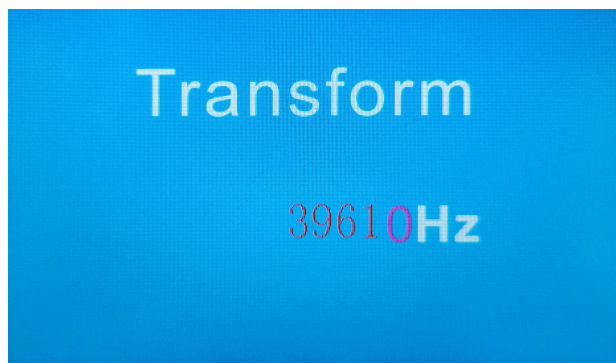

ultrazvuku v rozsahu od 29690Hz až 39610Hz. Navíc si můžete nastavit sílu působení ultrazvuku od úrovně 1 (malá) až 10 (nejvyšší). V obecné rovině platí, čím větší tělesná partii, tím větší množství podkožního tuku. Je tedy třeba pracovat s vyšším výkonem. **Frekvenci ultrazvuku (Hz) doporučujeme neměnit a ponechat na výchozím nastavení. Čím je frekvence ultrazvuku nižší, tím se postupně snižuje komfort použití aplikační hlavičky na pleti.**

JAK TEDY SPRÁVNĚ ROZPOZNAT, JAKÝ STUPEŇ VÝKONU NASTAVIT?

Při nastavení postupujte následovně. Vždy začínejte na výkonu číslo 1 a základní frekvenci 29690Hz. Snažte se pocitově vnímat, jak působí ultrazvukové vlny na konkrétní tělesnou partii. Při používání můžete cítit jemné mravenčení, ale samotné ultrazvukové vlny by neměly způsobit nepříjemné až bolestivé pocity. Hlavním smyslem využití technologie ultrazvukových vln je neinvazivní a hlavně bezbolestné použití. Věnujte tedy zvýšenou pozornost, aby vám nastavený výkon nezpůsobil žádné nepříjemné pocity. Nelze přesně stanovit, jaký stupeň výkonu použít na konkrétní partii. Rozhodně neplatí, čím větší výkon použijete, tím rychleji dosáhnete požadovaných výsledků v redukci podkožního tuku. S nastavením výkonu je třeba zacházet velice opatrně. Vyšší výkon ultrazvukových vln uvolní v tukové tkáni do krevního oběhu více energie, kterou musí vaše játra následně zpracovat. V očekávání na dosažení požadovaných výsledků nespěchejte. I při vysoce sofistikovaném typu aplikace, jakou ultrazvuková kavitace rozhodně je, v lidském organismu probíhají určité procesy, které je třeba respektovat. Proto začínejte vždy na úrovni intenzity 1. Přidávejte postupně a s citem. Může i nastat situace, že nikdy nevyužijete celou škálu výkonu. Ponechávejte mezi aplikací vybraných tělesných partií větší časový rozestup - viz. pasáž **ČAS APLIKACE**. I přes šetrnost a neinvazivní charakter technologie je vaše zdraví na prvním místě.

DŮLEŽITÉ TIPY PŘI POUŽITÍ FUNKCE S ULTRAZVUKOVÝMI VLNAMÍ

- Při použití ploché aplikační hlavičky s ultrazvukem se vždy snažte, aby byla celá plocha aplikátoru v plném kontaktu s pletí.
- Použití je vždy spojeno se sonickým gelem. Hlavici s ultrazvukem nikdy nepoužívejte na suchou pokožku.
- Sonický gel můžete nanést na pleť nebo přímo na aplikační hlavičku. V průběhu aplikace vybrané partie sonický gel postupně doplňujte. Gel nanášejte postupně a po částech. Pokud se rozhodnete zaměřit se na obě stehna, nejprve naneste gel na jednu nohu, použijte aplikační hlavičku s ultrazvukem a poté naneste gel na druhou nohu. Gel se v průběhu použití postupně vstřebává a vysychá, proto je třeba jej pravidelně na pleť doplňovat. S množstvím nešetřete. Jde o přípravek, který je cenově velmi dostupný.
- V průběhu použití ultrazvuku můžete vnímat pískání. Nejedná se o závadu přístroje, ale přirozený průvodní jev působení ultrazvuku. Pokud je vám pískání nepříjemné, snižte úroveň intenzity působení ultrazvuku. K dispozici je rozsah od 1 do 10.

ČAS APLIKACE - ULTRAZVUK

Délka aplikace ultrazvukem by neměla překročit 20 minut na jednu partii. U párových částí těla se doporučuje rozdělit čas rovnoměrně mezi obě strany. V rámci jednoho dne je vhodné aplikovat přístroj maximálně na dvě oblasti. Opakované použití na stejné partii se doporučuje nejdříve po uplynutí 7 dní. Mezi jednotlivými aplikacemi je vhodné ponechat časový odstup. Přestávky mezi použitím jsou součástí doporučeného režimu a slouží k zachování komfortu a bezpečnosti při používání přístroje. Použití přístroje by mělo vždy probíhat v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ HLAVICE ULTRAZVUKEM

Při použití hlavice s technologií ultrazvuku je nezbytné aplikovat na povrch pleti hostečné množství sonogelu. **Hlavice se nesmí používat na suchou pokožku.** V průběhu použití sonogel z pleti postupně vysychá. **Průběžně tedy gel doplňujte**, aby hlavice stále po gelu klouzala.

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK



UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - ULTRAZVUK

PAŽE



Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na ruce. Aplikační hlavici přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně aplikujte vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujte se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.



Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem aplikujte postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.

PAS & BŘÍŠKO

Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživém pohybu. Takto aplikujte celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto aplikujte celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.

HÝŽDĚ

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto aplikovat celou oblast hýždí.

STEHNA & LÝTKA

Aplikační hlavicí se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavicí se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.



Aplikační hlavicí se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete aplikovat přední i zadní část končetiny.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - VAKUOVÉ SÁNÍ


1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje.
Poloha 1 – zapnuto. Tlačítko se rozsvítí. Přístroj se nachází v pohotovostním režimu - displej se aktivuje a zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.




2. Pomocí tlačítka **Function** zvolte program **VACUUM**.

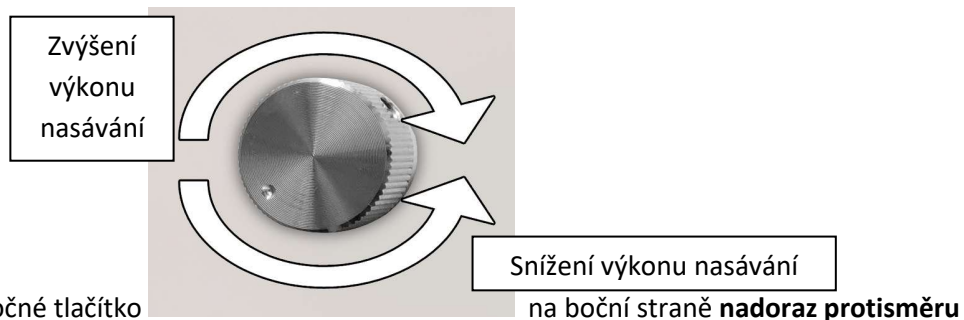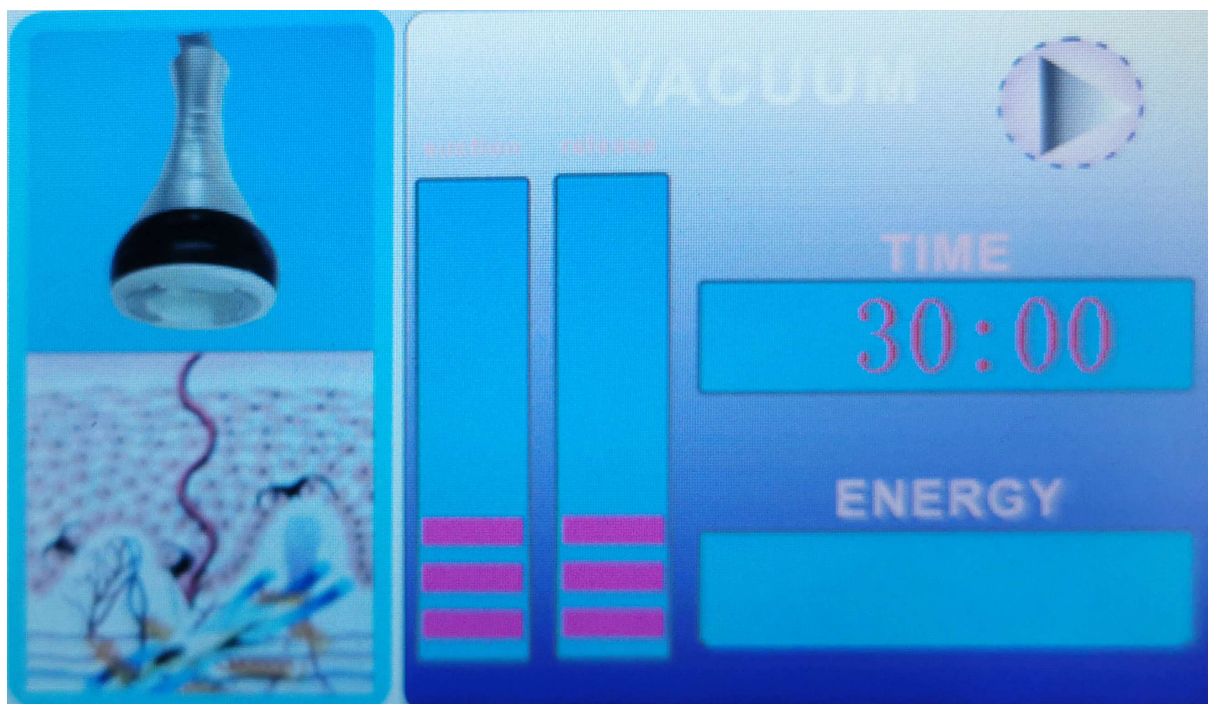

3. Ověřte, že je otočné tlačítko na boční straně **nadoraz protisměru hodinových ručiček** – výchozí výkon vakuového sání.

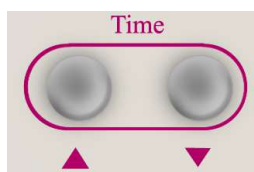


4. Pomocí tlačítka si můžete nastavit čas aplikace v rozsahu od 1 do 60 minut.

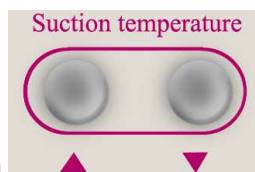

5. Pomocí tlačítka   si můžete nastavit délku vakuového sání v rozsahu hodnoty od 1 do 10.



6. Stiskněte tlačítko  pro nastavení délky uvolnění vakua. Pomocí tlačítka

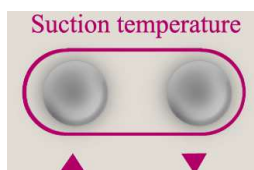


si můžete nastavit délku uvolnění vakua v rozsahu hodnoty od 1 do 10.



7. Stiskněte tlačítko  pro nastavení výkonu radiofrekvence. Rozsah nastavení je od hodnoty 1 až 10. Vždy začínejte od hodnoty 1 a přidávejte pomalu se zvýšenou opatrností. Řídit se můžete vnímáním tepla, které je průvodním jevem působení radiofrekvence. Pokud žádnou hodnotu nenastavíte, funkce působení radiofrekvence bude vypnuta.



8. Pomocí tlačítka  zahájíte aplikace pomocí vakuové hlavice. Aplikační hlavice nyní generuje vakuové sání v kombinaci s radiofrekvencí. Průběh aplikace zobrazuje animace na levé straně displeje.

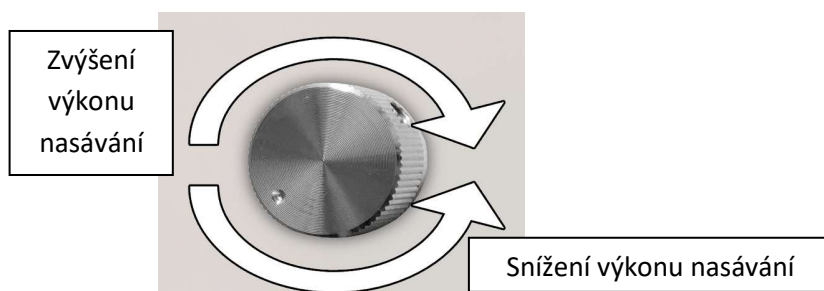

9. Pomocí otočného  kolečka na boční straně si můžete nastavit sílu působení vakuového sání. Výkon zvyšujte vždy pomalu se zvýšenou opatrností.
10. V průběhu působení vakuového sání můžete slyšet jemné cvakání. Jedná se o průvodní zvuk vzduchového čerpadla. Tento typ zvuku je v pořádku a není závadou.



11. Pomocí tlačítka **ON/OFF** můžete aplikaci kdykoliv přerušit a znovu pokračovat.



12. Pomocí tlačítka **Function** můžete kdykoliv změnit režim aplikace.

13. Po uplynutí času se přístroj navrátí zpět do pohotovostního režimu. Displej zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.



14. Zvolte pomocí tlačítka **Function** další režim aplikace nebo přístroj vypněte pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 0 – vypnuto. Tlačítko zhasne. Displej se vypne.

BR-1960
BODYFACE ULTIMATE



UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE – VAKUOVÉ SÁNÍ

pohybová masáž

Aplikační hlavici se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí kontaktního gelu. **Nikdy nepoužívejte masáž přístrojem na sucho, ale v kombinaci s kontaktním sonogelem.** Při pohybové masáži je důležité nastavit **sílu nasávání na co nejmenší úroveň.** Zároveň nastavit **co nejdelší interval uvolnění vakua.** Pokud přístroj nasaje část těla až příliš silně, aplikátorem už nebude možné pohnout.




bodová masáž

Bodová masáž spočívá v aplikaci konkrétní tělesné partie po částech – viz. obrázek. Přístroj zapnete a přiložíte aplikátor k pleti. Po nastavení všech parametrů spustí přístroj funkci nasávání v síle a délce, kterou si sami zvolíte. Při bodové masáži může po aplikaci plet zarudnout. Pokud si nastavíte nasávání příliš silné, mohou se na pleti objevit i mírné otoky až modřiny, které však v průběhu několika dní zcela zmizí. Vždy začínejte na nižší síle působení vakua a postupně si přidávejte dle vašeho pocitu. **Rozhodně hned nezačínajte na nejvyšších hodnotách!**



Při aplikaci ostatních částí těla postupujte podle následující grafické vizualizace. Rozdíl mezi pohybovou a bodovou masáží spočívá nejen v odlišné technice, ale v účinku působení na tělo. **Pohybová masáž** přispívá zejména ke zlepšení činnosti lymfy. Tělo získá lepší odvádět nadbytečnou vodu z končetin. Při **bodové masáži** podpoříte lokální krevní oběh, což přispívá k celkové efektivnější látkové výměně a odvodu škodlivin. Ideální na použití partií s výskytem příznaků celulitidy (pomerančové kůže).

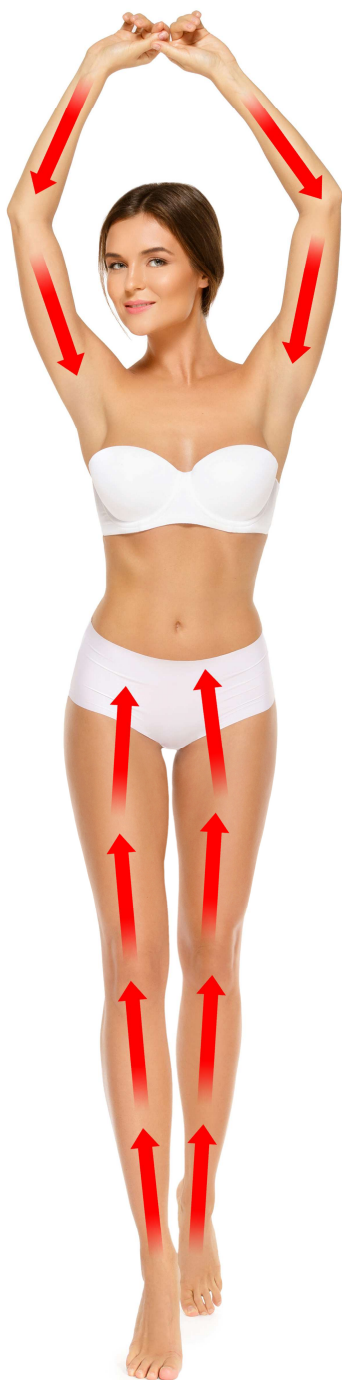

pohybová masáž



bodová masáž

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - VAKUOVÉ SÁNÍ

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



DŮLEŽITÝ TIP K POUŽÍVÁNÍ VAKUOVÉ HLAVICE


Před použitím vakuové hlavice doporučujeme na pleť aplikovat masážní olejíček libovolné značky. Nezáleží na značce, ale olejové konzistenci. Aplikační hlavice bude po těle lépe klouzat. Olejíček navíc tak rychle nevysychá ve srovnání se sonogelem. V tomto případě nedoporučujeme aktivovat funkci radiofrekvence na vakuové hlavici. Olejová konzistence a přípravek si s radiofrekvencí příliš „nerozumí“. Pro aplikaci těla radiofrekvencí použijte aplikační hlavici se 4 kolíčky. Pokud si přesto přejete používat vakuovou hlavici s radiofrekvencí, kterou přenáší dvě kontaktní plochy, aplikujte na pleť sonogel.


OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE – RADIOFREKVENCE


1. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje.
Poloha 1 – zapnuto. Tlačítko se rozsvítí. Přístroj se nachází v pohotovostním režimu - displej se aktivuje a zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.





2. Pomocí tlačítka **Function** zvolte program **FACE RF**.

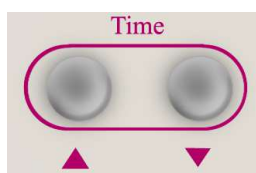

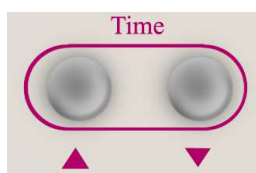
3. Pomocí tlačítka  si můžete nastavit čas aplikace v rozsahu od 1 do 60 minut.

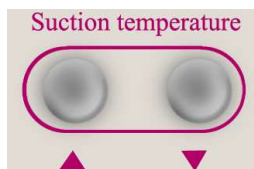

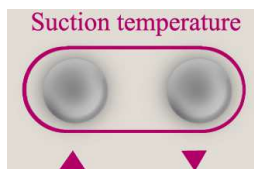4. Pomocí tlačítka  si můžete nastavit intenzitu radiofrekvence v rozsahu hodnoty od 1 do 10. Rozsah nastavení je od hodnoty 1 až 10. Vždy začínejte od hodnoty 1 a přidávejte pomalu se zvýšenou opatrností. Řídit se můžete vnímáním tepla, které je průvodním jevem působení radiofrekvence.

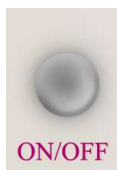

5. Pomocí tlačítka **ON/OFF** zahájíte aplikaci pomocí radiofrekvence. Aplikační hlavice nyní generuje radiofrekvenční vlny. Průběh aplikace zobrazuje animace na levé straně displeje.

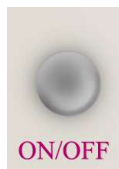

6. Pomocí tlačítka **ON/OFF** můžete aplikaci kdykoliv přerušit a znovu pokračovat.



7. Pomocí tlačítka **Function** můžete kdykoliv změnit režim aplikace.

8. Po uplynutí času se přístroj navrátí zpět do pohotovostního režimu. Displej zobrazuje nápis **CAVITATION RF SYSTEM**.



9. Zvolte pomocí tlačítka **Function** další režim aplikace nebo přístroj vypněte pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje. Poloha 0 – vypnuto. Tlačítko zhasne. Displej se vypne.

ČAS APLIKACE - RADIOFREKVENCE

Délku aplikace na pleti nelze stanovit s absolutní přesností podle pevně daných tabulek nebo jednotných časových údajů. Optimální délka stimulace pleti pomocí radiofrekvenčních vln se může lišit v závislosti na řadě individuálních faktorů, mezi které patří zejména aktuální stav pleti, věk uživatele, typ a citlivost pleti, stejně jako dlouhodobý způsob péče o pleť. V obecné rovině platí, že při úplně prvním použití by měla být aplikace krátká, zpravidla v řádu jednotek minut. Úvodní použití slouží především k tomu, aby uživatel mohl sledovat, jakým způsobem pleť na působení radiofrekvenčních vln reaguje, a jak rychle se po aplikaci vrací do běžného stavu, například z hlediska citlivosti na dotyk nebo přechodného zarudnutí. Na základě této individuální reakce lze následně orientačně upravit délku aplikace i časový rozestup mezi jednotlivými procedurami. Délka aplikace by měla vždy zohledňovat také velikost aplikované plochy. Aplikování celé plochy obličeje je časově náročnější než cílená aplikace na menší oblasti, například koutky úst nebo jemné vrásky v okolí očí.

Pokud vycházíme z běžné uživatelské praxe a orientačních zkušeností, stejnou oblast pleti je možné znovu aplikovat pomocí radiofrekvence zpravidla po uplynutí přibližně 7 až 10 dnů, vždy s ohledem na individuální reakci pleti a dodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhňte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhněte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhňte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

CO JE NORMÁLNÍ PO APLIKACI

- zarudnutí (obvykle ustoupí do 1–24 hodin),
- pocit tepla nebo „horké pleti“,
- mírný otok,
- jemná citlivost.

JAK POKOŽKU CO NEJLÉPE ZKLIDNIT

1) Chladit, ale ne ledem přímo

- Použijte **chladivý gelový sáček** nebo **studený obklad** zabalený v látce
- Chladte přibližně 5 až 10 minut v intervalech
- Nepřikládejte led přímo na kůži – může to způsobit podráždění či poškození

2) Nanést zklidňující přípravky

Vhodné jsou:

- **aloe vera gel** (čistý, bez parfemace),
- **panthenol** (např. ve formě pěny nebo krému),
- **termální voda ve spreji**,
- produkty s **niacinamidem** (snižuje zarudnutí),
- lehké **hydratační krémy bez alkoholu a parfemace**.

Vyhněte se:

- aktivním látkám jako **retinol, AHA/BHA kyseliny, vitamín C**,
- parfémovaným nebo mastným krémům.

3) Vyhnout se teplu 24–48 hodin

To znamená:

- sauna
- solárium
- horké sprchy
- intenzivní sportování (zvýšení teploty a pocení prodlouží zarudnutí)
- přímé slunce

4) Neškrábat a nedráždit pokožku

- Nemačkejte, nedrhňte, nepoužívejte peelingy.
- Plet ponechejte v klidu.

5) Použít SPF

- Pokud jdete ven, naneste **SPF 30–50**, i když je zataženo.
- Plet je po radiofrekvenci citlivější na UV záření.

JAK DLOUHO MŮŽE POCIT TEPLA TRVAT?

- Běžné reakce odezní během **několika hodin až jednoho dne**.
- Citlivé pleti to může být **až 48 hodin**.

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU



METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

1. Čelo

- Pohybuj hlavicí **od středu čela směrem do stran k vlasové linii**
- Pohyby jsou **vodorovné, plynulé a lehce tažené ven**
- Postupuj po čele **odspodu nahoru**, aby byla pokryta celá plocha

2. Oblast mezi obočím (kořen nosu)

- Veď hlavicí **od kořene nosu směrem vzhůru ke středu čela**
- Pohyb je **rovný, jemný a tažený nahoru**

3. Nos

- Začni u kořene nosu
- Pohybuj se **směrem dolů po hřbetu nosu**
- Po stranách nosu veď pohyby **lehce šikmo ven směrem k tvářím**

4. Oční okolí (mimo oční víčka)

- Pohyby veď **po kostním okraji očnice**, nikdy ne přímo na víčko
- Začni u vnitřního koutku oka
- Pokračuj **obloukovým pohybem směrem ven a lehce nahoru k spánkům**
- Pohyb je **velmi jemný, pomalý a plynulý**

5. Tváře

- Začni u nosu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k uším a lehce nahoru**
- Pohyby mohou být:
 - obloukové
 - nebo krátké tahy směrem vzhůru
- Cílem je **podpora liftingového efektu**

6. Oblast nad horním rtem

- Neaplikuj přímo na rty
- Pohybuj hlavicí **od středu nad horním rtem směrem šikmo nahoru k nosním křídlům**
- Pohyb je **jemný a krátký**

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

7. Okolí úst

- Začni u koutků úst
- Veď pohyb **směrem ven a lehce nahoru**
- Vyhni se přímému kontaktu se rty
- Pohyby jsou **obloukové, zjemňující mimické linie**

8. Brada a oblast pod bradou

- Na bradě veď pohyby **od středu brady do stran**
- Pod bradou pohybuj hlavici **směrem vzhůru k čelisti**
- Pohyby jsou **tažené nahoru**, podporující zpevnění kontur

9. Krk

- Pohyby veď **od spodní části krku směrem vzhůru k bradě**
- Na stranách krku můžeš vést pohyb **šikmo nahoru**
- Vyhni se silnému tlaku v oblasti štítné žlázy

10. Dekolt


- Začni u středu dekoltu
- Pohybuj hlavici **směrem ven k ramenům**
- Pohyby jsou **široké, plynulé a jemně tažené**

Obecná doporučení

- Pohyby jsou vždy **plynulé, pomalé a kontrolované**
- Netlač, nech hlavici klouzat po pleti

Vždy se snaž pohybovat **směrem nahoru nebo ven**, nikoli dolů

MAPA CITLIVOSTI PLETI

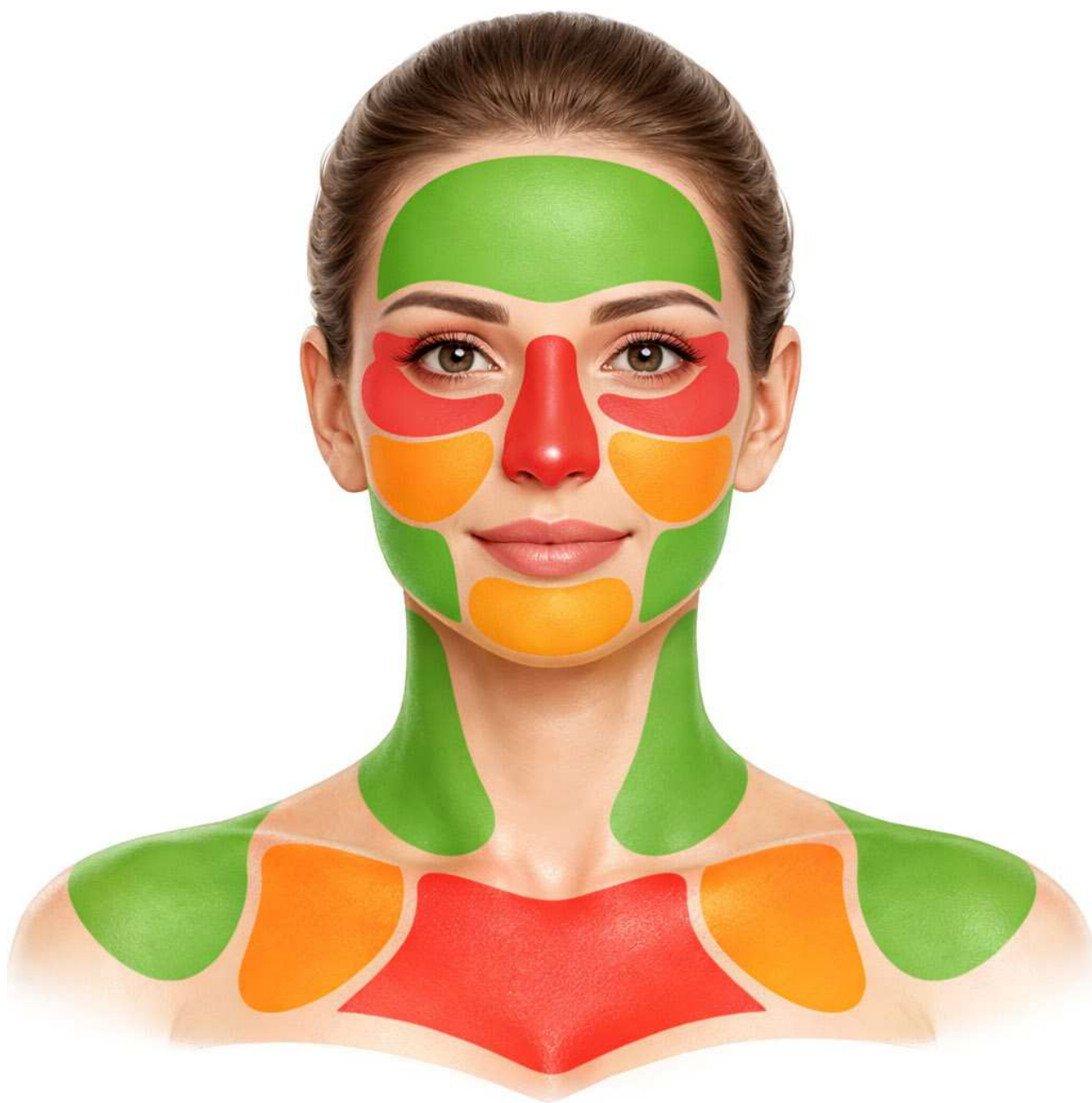


● NÍZKÁ CITLIVOST

● STŘEDNÍ CITLIVOST

● VYSOKÁ CITLIVOST

BEAUTYRELAX VIDEA NA YOUTUBE

Instruktažní videa na model se stejnými/obdobnými funkcemi pro vaši inspiraci.

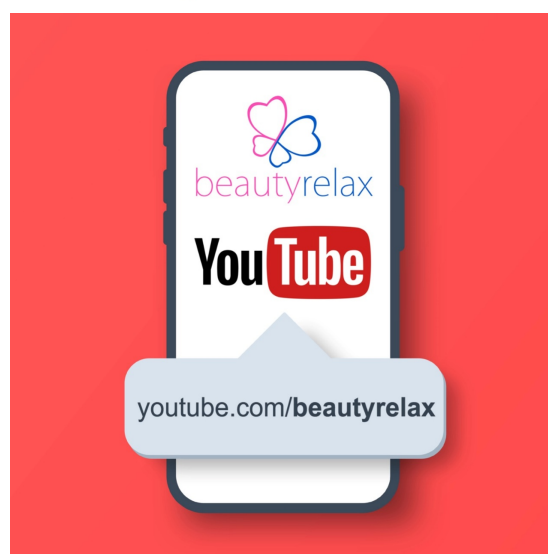

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by měla aplikace správně probíhat?

Před prvním použitím přístroje si pečlivě prostudujte celý návod k obsluze a věnujte zvýšenou pozornost zejména bezpečnostním upozorněním a omezením použití. Doporučuje se seznámit se také se seznamem tělesných partií, pro které jsou jednotlivé aplikační hlavice určeny. Pokud si nejste jisti vhodností použití s ohledem na svůj zdravotní stav, doporučuje se konzultace s praktickým lékařem. Aplikaci provádějte v klidném prostředí, v poloze vleže nebo vsedě, která vám zajistí dostatečný komfort. Vhodné je lehké a pohodlné oblečení, které neomezuje pohyb.

Jaká opatření je vhodné dodržovat před a po aplikaci?

Před i po použití přístroje se doporučuje dodržovat základní zásady celkové pohody a komfortu. Vhodný je dostatečný pitný režim a lehká strava. Po aplikaci lze zařadit lehkou pohybovou aktivitu, například krátkou procházku nebo nenáročné protažení, která přispívá k celkovému pocitu svěžesti a uvolnění. Tato doporučení mají obecný wellness charakter a nejsou zdravotním ani léčebným pokynem.

Je aplikace technologiemi přístroje bolestivá?

Použití přístroje je při dodržení pokynů uvedených v návodu zpravidla vnímáno jako komfortní.

- Při použití ultrazvukové hlavice může uživatel vnímat jemné mravenčení nebo lehké vibrace.
- Při použití radiofrekvence je běžným průvodním jevem pocit tepla v místě aplikace. Jedná se o běžné subjektivní vjemy, které nejsou považovány za závadu zařízení.

Jak poznám, že aplikační hlavice pracuje?

Při použití ultrazvukové hlavice může být slyšitelné slabé pískání nebo vysoký tón. Tento jev je běžným průvodním projevem ultrazvukové technologie a může být vnímán různě podle citlivosti uživatele. Pokud je zvuk nepříjemný, lze snížit intenzitu nastavení, případně upravit parametry podle pokynů uvedených v kapitole o nastavení přístroje.

Jaké výsledky lze očekávat?

Výsledky použití přístroje jsou individuální a závisí na celé řadě faktorů, zejména na způsobu použití, frekvenci aplikace, vlastnostech pokožky a celkové životosprávě uživatele. Přístroj je určen jako podpůrný nástroj kosmetické a estetické péče zaměřené na vzhled pokožky a kontur těla. Neslouží k redukci tělesné hmotnosti, nenahrazuje zdravý životní styl ani pravidelný pohyb.

Je používání přístroje bezpečné?

Při používání na určených partiích a při dodržení všech pokynů uvedených v návodu je používání přístroje považováno za bezpečné z hlediska jeho určeného kosmetického použití. Použití ultrazvuku a radiofrekvence je vždy spojeno s aplikací kontaktního gelu, který zajišťuje správný kontakt aplikační hlavice s pokožkou a komfort při používání.

Jaké zásady je vhodné dodržovat při používání jednotlivých technologií?

Doporučuje se:

- nepřekračovat doporučenou dobu aplikace na jednu partii,
- nepoužívat více technologií současně na stejnou oblast bez přestávky,
- vyhýbat se oblastem, které nejsou určeny k aplikaci dle návodu.

Letmý nebo náhodný dotyk citlivějších oblastí nevadí, cílená a dlouhodobá stimulace však není doporučena.

Proč mohu při používání ultrazvuku vnímat pískání v uších?

Slabé pískání nebo vysoký tón je běžným akustickým průvodním jevem ultrazvukové technologie. Nejedná se o závadu přístroje. Pro zvýšení komfortu lze upravit intenzitu nastavení nebo ponechat výchozí hodnoty doporučené výrobcem.

Proč je důležitá péče o aplikační hlavice po každém použití?

Po každém použití je nutné aplikační hlavice očistit od zbytků gelu a dezinfikovat, zejména při používání více osobami. Doporučuje se použít dezinfekční prostředek na bázi alkoholu nanesený na hadřík. Hlavice vždy důkladně osušte. Dodržování těchto zásad přispívá k hygieně provozu a delší životnosti přístroje.

Může přístroj používat více osob?

Ano, přístroj může používat více osob za předpokladu, že je po každém použití provedena důkladná dezinfekce aplikačních hlavic. Tím se minimalizuje riziko přenosu nečistot při kontaktu s pokožkou.

V jakém stavu by měla být pleť před použitím radiofrekvence?

Pokožka by měla být čistá, odlícená a zbavená povrchových nečistot. Nedoporučuje se provádět agresivní mechanické procedury bezprostředně před použitím radiofrekvence, aby nedošlo ke zvýšené citlivosti pleti.

Jaké přípravky je vhodné použít po aplikaci radiofrekvencí?

Po aplikaci se doporučuje použít běžný hydratační kosmetický přípravek, který přispívá k pocitu komfortu pokožky. Dočasné zarudnutí nebo pocit tepla jsou běžné a zpravidla během krátké doby odezní.

Jak lze působení radiofrekvence vnímat?

Použití radiofrekvence je obvykle spojeno s pocitem postupného zahřívání pokožky. Tento vjem je běžným průvodním projevem technologie a není považován za závadu zařízení.

Může aplikační hlavice pokožku poranit?

Při nesprávném použití nebo příliš vysokém nastavení intenzity může dojít k nepříjemným pocitům. Proto je důležité vždy začínat na nižších hodnotách a intenzitu zvyšovat postupně podle vlastního vnímání.

Jak lze jednotlivé aplikační hlavice kombinovat?

Jednotlivé technologie lze používat samostatně nebo v kombinaci, vždy však s ohledem na doporučené časy aplikace a přestávky. Kombinace slouží výhradně k estetické a relaxační péči a volba postupu je na uživateli.

Jak je to s aplikací strií a drobných nerovností pokožky?

Strie a drobné nerovnosti pokožky představují estetický prvek, který nelze zcela odstranit. Pravidelná kosmetická péče může přispět k optickému zmírnění jejich viditelnosti, přičemž výsledky jsou individuální a závislé na dlouhodobém používání.

Lze přístroj používat doma i v salonu?

Ano. Přístroj je konstrukčně navržen tak, aby byl vhodný jak pro domácí použití, tak pro provoz v kosmetických a wellness zařízeních, při dodržení všech hygienických a provozních požadavků.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Ne. Přístroj není zdravotnickým prostředkem. Je určen výhradně ke kosmetickému, estetickému a wellness použití a neslouží k diagnostice, prevenci ani léčbě jakýchkoli onemocnění.

Má přístroj certifikaci?

Ano. Přístroj splňuje platné evropské technické a bezpečnostní normy vztahující se na zařízení tohoto typu a je opatřen příslušným označením.



ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU

Vypnutí

Po ukončení aplikace přístroj vypněte. Čištění provádějte vždy pouze u vypnutého zařízení.

Okamžité odstranění gelu

Bezprostředně po použití odstraňte veškerý zbytkový vodivý gel:

- suchým, měkkým a neprašným hadříkem
- nebo jednorázovou papírovou utěrkou

Vodivý gel nikdy nenechávejte na hlavici zaschnout. Zaschlý gel způsobuje poškození kontaktů.

Čištění kontaktní plochy

Doporučený postup

- Navlhčete hadřík nebo vatovou tyčinku:
 - isopropylalkoholem (IPA 90–99 %)
 - nebo technickým lihem
- Jemně očistěte kontaktní plochu a piny.
- Nepoužívejte tlak ani abrazivní pomůcky.

Nouzová alternativa

- Pokud není alkohol k dispozici, lze výjimečně použít:
 - čistou destilovanou vodu
- Destilovanou vodu nanášejte vždy pouze na hadřík nebo tyčinku, nikdy přímo na hlavici.

Destilovaná voda slouží pouze k odstranění nečistot. Nejedná se o kontaktní ochranný přípravek.

Sušení

Po čištění nechte hlavici:

- volně vyschnout na vzduchu po dobu minimálně 5–10 minut
- ujistěte se, že kontakty jsou zcela suché

✗ Nepoužívejte fén, topení ani jiné zdroje tepla.

Kontrola před uložením

Před uložením zkontrolujte:

- že na kontaktech nezůstaly zbytky gelu
- že kontakty nejsou vlhké
- že nejsou patrné známky oxidace (zabarvení, zmatnění)

V případě zjištění oxidace hlavici dále nepoužívejte a kontaktujte servis.

Správné skladování

Aplikační hlavici skladujte:

- v suchém prostředí
- v uzavíratelném obalu nebo originálním pouzdře

Doporučeno:

- použití **silikagelu** proti vlhkosti

✗ Neskladujte ve vlhkém prostředí, koupelně nebo v neuzavřených brašnách.

Důležitá upozornění

- Neumývejte hlavici pod tekoucí vodou
- Neponořujte hlavici do kapaliny
- Nepoužívejte dezinfekční prostředky s chlórem nebo peroxidem
- Nepoužívejte brusné ani kovové nástroje

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma **SANTADRIA s.r.o.**, IČO: 29195454, DIČ: CZ29195454, tímto informuje zákazníka, že výrobek je určen ke **masážním a relaxačním** v souladu s návodem k obsluze a **není zdravotnickým prostředkem** ani neslouží k diagnostice, prevenci nebo léčbě jakéhokoli onemocnění.

Prodávající odpovídá za vlastnosti výrobku v rozsahu stanoveném **platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky**, zejména za shodu výrobku s technickými a bezpečnostními požadavky v okamžiku jeho uvedení na trh.

Prodávající **nenese odpovědnost za škody nebo újmy**, které vzniknou v důsledku:

- používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bezpečnostními pokyny nebo určeným účelem použití,
- neodborného, nevhodného nebo nadměrného používání výrobku,
- používání výrobku osobami, u nichž je jeho použití podle návodu kontraindikováno,
- zásahů do výrobku, jeho úprav, oprav nebo manipulace provedených neoprávněnou osobou,
- používání výrobku v rozporu s platnými právními předpisy v zemi, kde je výrobek používán.

V případě **komerčního používání výrobku** bere zákazník na vědomí, že **odpovědnost za splnění veškerých požadavků vyplývajících z platné legislativy**, zejména v oblasti odborné způsobilosti obsluhy, licencí, povolení nebo jiných zákonných podmínek, **nese výhradně provozovatel** zařízení. Prodávající nenese odpovědnost za právní důsledky vyplývající z komerčního používání výrobku v rozporu s právními předpisy platnými v konkrétní jurisdikci.

Tato doložka **neomezuje ani nevylučuje práva zákazníka**, která mu náleží podle závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele, ani odpovědnost prodávajícího za vady výrobku či škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu, v jakém ji nelze podle práva vyloučit.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz

beautyrelax

PO - PÁ 11:00 - 18:00
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Estetický multifunkční přístroj BODYFACE ULTIMATE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-1960**

EAN 8594166118706

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60601-1-2:2007 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008 EN 60601-1:2006

Produkt není zdravotnický prostředek.

Není určen k léčbě žádného onemocnění.

Slouží pro sportovní rekondiční masáž za účelem uvolnění svalů na vybraných částech těla.

Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů - TARIC 90191010

Při komerčním použití je třeba klást důraz na hygienu provozu přístroje.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.4.2021

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel