

NÁVOD K OBSLUZE

Estetický přístroj na formování postavy

BeautyRelax BR-2833

CELLUFORM JUJY



OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	4
UPOZORNĚNÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
KONTRAINDIKACE	6
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	6
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	6
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	7
ULTRAZVUK	7
RADIOFREKVENCE	7
EMS	8
MIKROPROUD MFIP	8
FOTONOVÉ SVĚTLO	8
HLAVNÍ VÝHODY	9
CO MŮŽETE OČEKÁVAT	9
TECHNICKÉ PARAMETRY	11
OBSAH BALENÍ	11
POPIS PŘÍSTROJE	12
AUTOMATICKÉ PROGRAMY	15
OVLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	16
DÉLKA & FREKVENCE POUŽITÍ PŘÍSTROJE	18
TEST PLETI	18
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	19
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA	20
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	25
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	25
SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE	26
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	27
PÁR VĚT ZÁVĚREM	29
NABÍJENÍ BATERIE	30
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	30
CERTIFIKACE	30
DOVOZCE	30
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	31

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Estetický přístroj pro neinvazivní ošetření vybraných částí těla pracuje s technologiemi, které jsou bezbolestné a bezpečné. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost splňuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených bezpečnostních norem. Aby bylo možné efektivně stimulovat podkožní tukovou tkáň, pracuje přístroj s určitým výkonem. Pokud nebudete postupovat dle uvedených pokynů, nebudete ctít upozornění a výčet kontraindikací, můžete si váš zdravotní stav v krajním případě negativně ovlivnit. Na druhou stranu nemějte z používání přístroje obavu. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny používání v domácích podmínkách bez dohledu erudované osoby z oblasti zdravotnictví.

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie masážních/estetických přístrojů. Nejedná se o zdravotnický prostředek. **Neslouží kléčbě obezity ani jiných souvisejících omezení.** Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají v redukci podkožního tuku a zlepšení pružnosti pleti.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní ošetření. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky neprotrhne kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost adaptéru a všech elektronických součástí.
- Ošetření je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (sonogel). Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Technologie přístroje získají lepší schopnost navázat se na pleť.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.

Tým BeautyRelax.cz

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Radiofrekvence, EMS pulzy a MFIP pulzy tak mohou do pleti lépe pronikat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Epilepsie, cukrovka nejzávažnější typu, aktuální virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Kožní onemocnění na místě použití přístroje
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (platí pouze pro oblast použití přístroje)
- Cévní poruchy nebo arterioskleróza
- Těhotenství
- Osoby, které mají potíže se srážlivostí krve a neřeší tento problém medikamenty
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem

ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Oblast štítné žlázy
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Stehna
- Zadeček
- Lýtka



Poznámka: párová oblast těla je brána jako jedna partie (pravé a levé lýtko = jedna partie)

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Estetický přístroj na tělo BeautyRelax Celluform Juju je určen pro šetrnou metodu ošetření tukové tkáně. Dosažitelný dvoufázový efekt: stimulace tukové tkáně a zvýšení pružnosti pleti. Potlačení příznaků celulitidy. Moderní pokročilé technologie: radiofrekvence, ultrazvuk, MFIP mikroproud, EMS pulzy, červené, modré a fialové světlo. Neinvazivní charakter ošetření. Určeno pro podbradek, paže, boky, břicho, hýždě, stehna, lýtka. Bezdrátové použití díky vestavené nabíjecí baterii. Formování postavy nebylo díky modelu BeautyRelax Celluform Juju efektivnější!

ULTRAZVUK

Aplikační hlavice generuje vysokofrekvenční ultrazvukové vlny, které pronikají do podkoží s frekvencí 80KHz. Tkáně následně absorbují takto generovanou energii. Dochází k narušení integrity tukové buňky a uvolňuje se tuk. Uvolněný tuk se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Odstraněný tuk se zpět do tkáně nevrací. Ultrazvuková kavitace je bezbolestná, neinvazivní, šetrná, účinná a hlavně trvalá metoda pro redukci tuku na nejvíce problematických partiích.



RADIOFREKVENCE

Technologie radiofrekvence si získala za poslední roky obrovskou oblibu v oblasti estetického ošetření těla. Mezi jeho hlavní výhody patří vysoká míra šetrnosti a efektivity. Aplikátor po přiložení na ošetřovanou oblast uvolňuje energii se zcela specifickou frekvencí a rozsahem výkonu. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis a tukové tkáni. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Radiofrekvence aktivně stimuluje tukové buňky s cílem uvolnění energie, kterou následně tělo zpracuje. Buňky zmenší svoji velikost a tím dochází ke zmenšení rozměrů tukové tkáně. Tohoto procesu je možné dosáhnout pravidelným používáním za podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze. Projevem působení radiofrekvence je pocit vnímání tepla. Nejedná se však o teplo, které by ohřívalo vaši pleť aplikační hlavicí, která by se zahřála. Teplo můžete vnímat na povrchu pleti, které však proniká dále do vrstvy dermis a dále k tukové tkáni. Teplo způsobuje radiofrekvenční vlnění.



EMS

Kontaktní plochy aplikační hlavice přenáší při kontaktu s pletí jemné elektrické mikropulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo ke svalům. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily účinné, ale zároveň bezbolestné ošetření pleti. Dochází ke kontrakci svalů a tím jejich posílení. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. Docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Potlačuje projev celulitidy. Plet má omlazený a prozářený vzhled. To vše neinvazivně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů. Projevem působení technologie EMS je pocit mravenčení na pleti.



MIKROPROUD MFIP

Informace o použití elektrického proudu ve vás může vyvolat strach případně smíšené pocity. **Nemějte rozhodně žádnou obavu!** V případě elektrického proudu, který používají kosmetické přístroje, jde o vysoce bezpečnou metodu ošetření pleti. Výkon je omezen tak, abyste si žádným způsobem nemohli ublížit. Technologie mikroproudu vychází ze stejného základu, jako EMS pulzy. Jedná se o pulzy elektrického proudu, které mají velice specifickou frekvenci a výkon. Mikroproud působí do vrstvy dermis pro podporu elastických vláken. Oproti tomu EMS pulzy mají výkon a frekvenci zvolenou tak, aby pronikly hlouběji až ke svalovým vláknům. Projevem působení technologie EMS je pocit pulzování na pleti.



FOTONOVÉ SVĚTLO

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

ČERVENÉ SVĚTLO (vlnová délka 625nm)

- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků.
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni.
- Brání v tvorbě pigmentu.

MODRÉ SVĚTLO (vlnová délka 465nm)

- Aktivuje porfyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie).
- Antibakteriální a protizánětlivý účinek.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Bezpečné a efektivní ošetření.

FIALOVÉ SVĚTLO - kombinuje červené a modré světlo

HLAVNÍ VÝHODY

- Moderní technologie, které pracují ve 3 jednotlivých programech
- Efektivní dosažení výsledků ve srovnání s přístroji pouze s jednou technologií
- Neinvazivní charakter ošetření
- Nezpůsobuje žádné nepříjemné pocity
- Bezbolestné a naprosto bezpečné používání
- Bez jakýchkoliv vedlejších účinků

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

- Dosažitelné a viditelné výsledky i v případech, kdy tuk prorůstá svalovou hmotou (zejména u mužů nebo sportovně založených žen)
- Aktivní stimulace tukové tkáně z problematických partií ženského i mužského těla
- Formování význačných kontur na rukou, nohách i na těle
- Zpevňování a vypínání pokožky



TECHNICKÉ PARAMETRY


- Časovač: 10 minut
- Frekvence radiofrekvence: 1Mhz
- Frekvence ultrazvuku: 80Khz
- Frekvence EMS: 90KHz
- Frekvence MFIP mikroproudu: 1500Hz
- Vlnová délka červeného světla: 625nm
- Vlnová délka modrého světla: 465nm
- 5 úrovní nastavení intenzity
- Napájení: li-ion baterie
- Kapacita baterie: 1500mAh
- Napětí: 5V
- Proud: 1A
- Výkon: 6W
- Rozměry: 23x20x15cm
- Hmotnost: 335g

OBSAH BALENÍ

- Estetický přístroj na formování postavy BeautyRelax Celluform Juju BR-2833.
- Napájecí kabel.
- Síťový adaptér 220V.
- Stojánek.
- Pouzdo.
- Návod k obsluze.

POPIS PŘÍSTROJE


Horní strana přístroje

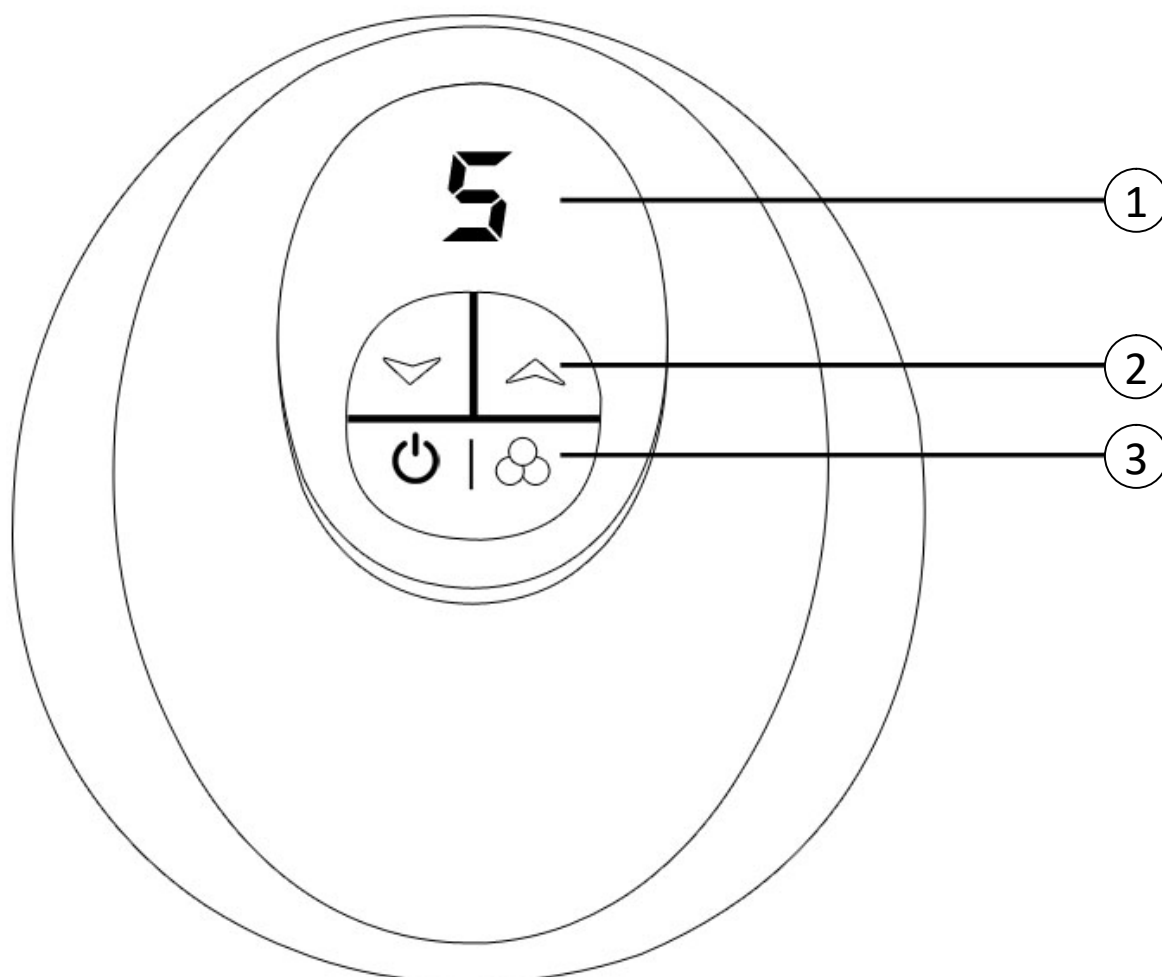

1. Displej
2. Nastavení intenzity (zvýšení, snížení)
3. Tlačítko ON/OFF/MODE

POPIS PŘÍSTROJE


Spodní strana přístroje

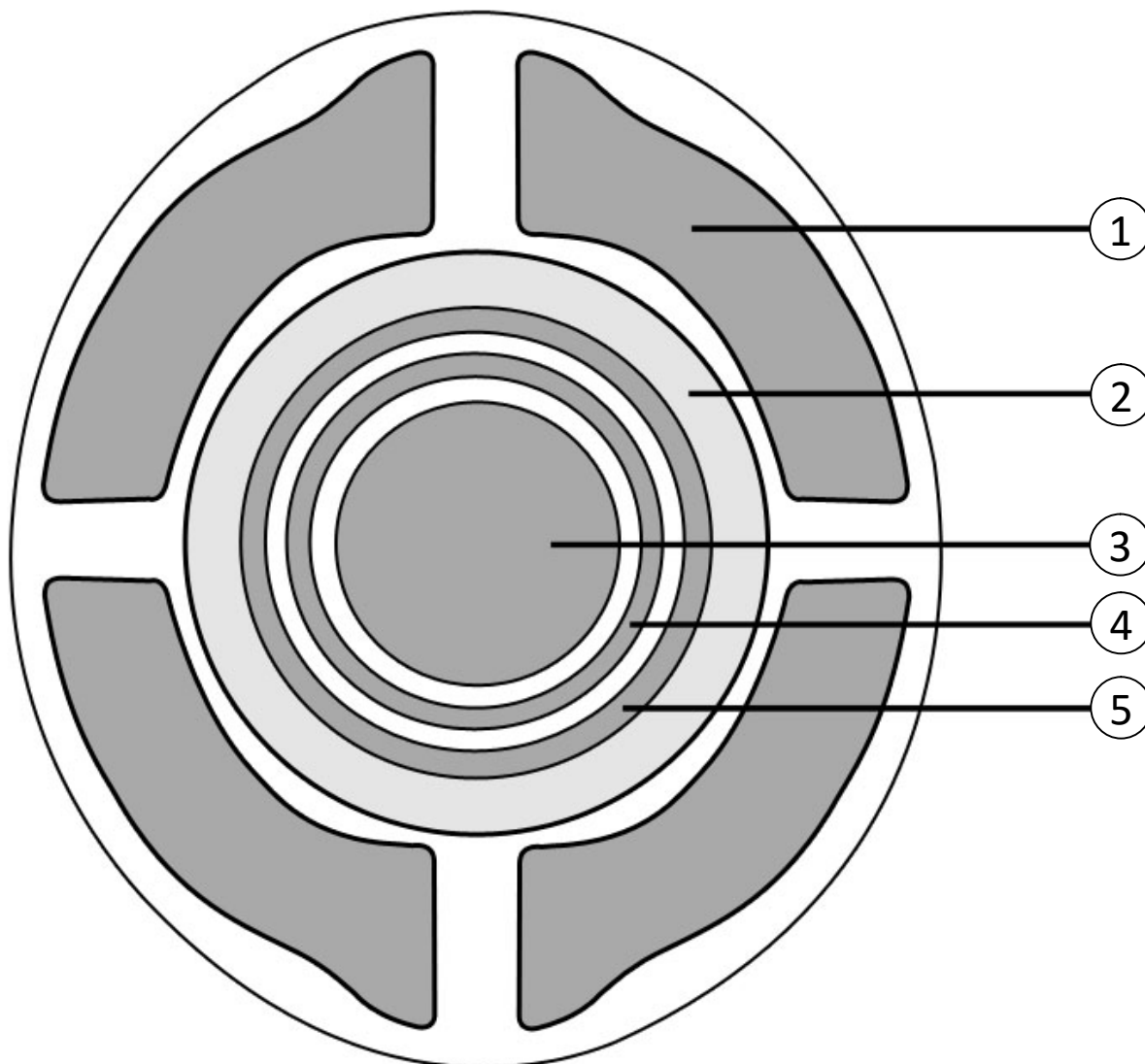

1. Aplikační hlavice technologie **MFIP**
2. Světlo fotonové terapie
3. Aplikační hlavice technologie **ULTRAZVUK**
4. Aplikační hlavice technologie **RADIOFREKVENCE + EMS**
5. Aplikační hlavice technologie **RADIOFREKVENCE + EMS**

POPIS PŘÍSTROJE

Boční strana přístroje

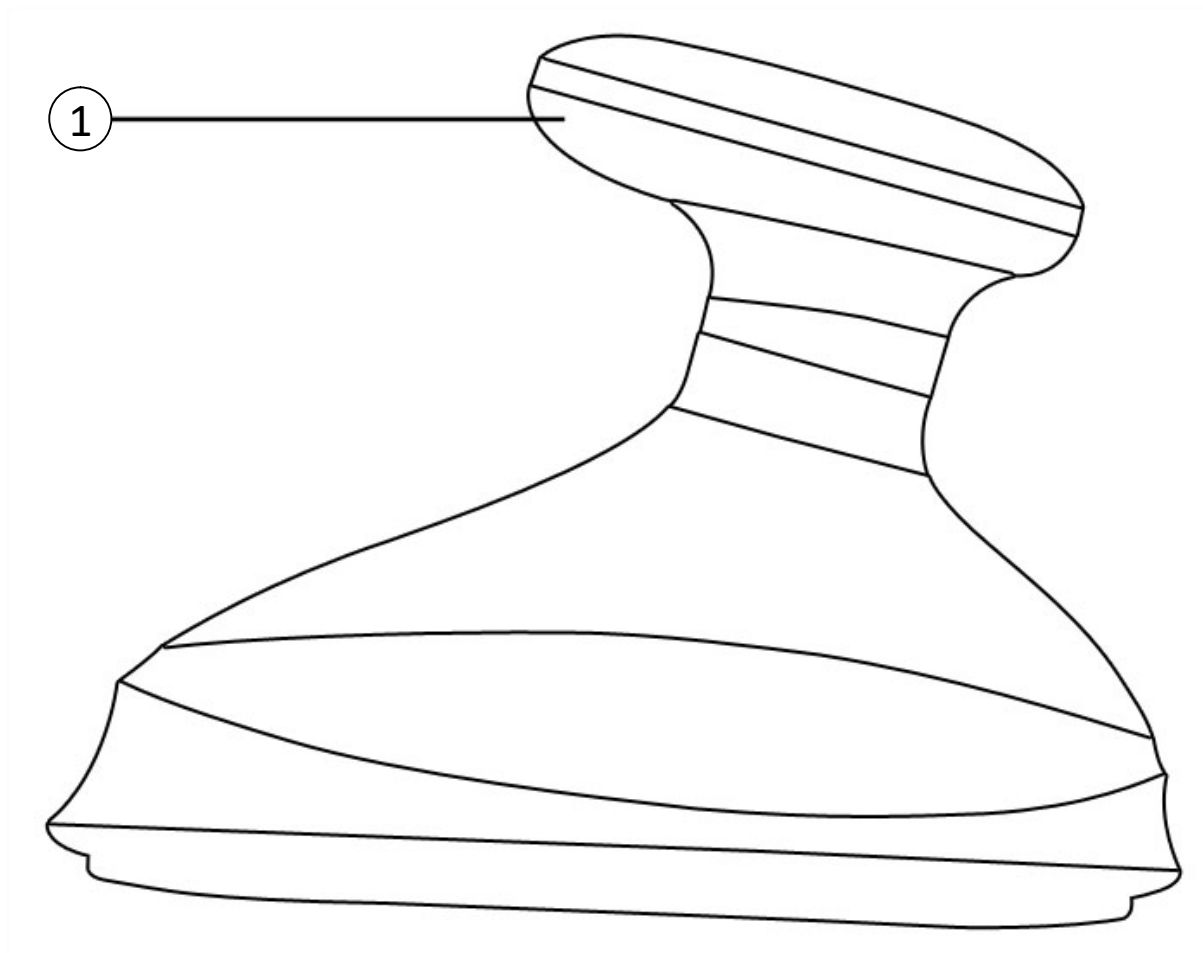

1. Kontaktní elektrody pro konektor nabíjecího kabelu


AUTOMATICKÉ PROGRAMY

Přístroj nabízí pro použití 3 automatické programy. Každý program aktivuje specifickou kombinaci technologií. Automatické programy pracují podle následujícího schéma:



RUCE

1. ULTRAZVUK
2. RADIOFREKVENCE
3. EMS
4. MFIP
5. MODRÉ SVĚTLO

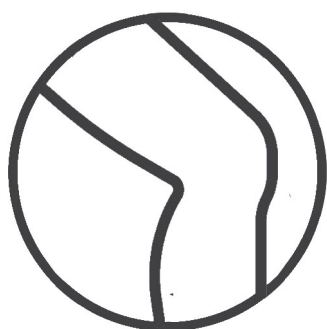


NOHY

1. ULTRAZVUK
2. RADIOFREKVENCE
3. EMS
4. MFIP
5. ČERVENÉ SVĚTLO



PAS, BOKY A HÝŽDĚ

1. ULTRAZVUK
2. RADIOFREKVENCE
3. EMS
4. MFIP
5. FIALOVÉ SVĚTLO (ČERVENÉ + MODRÉ)

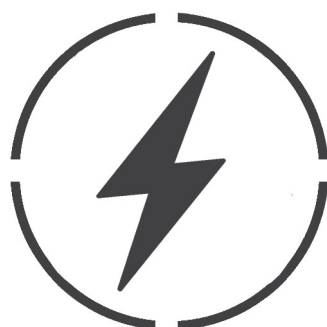

INDIKACE STAVU BATERIE

Displej zobrazuje také ikonu indikace stavu baterie. Jakmile se ikona rozbliká, je třeba přístroj připojit k napájecímu adaptéru.

OVLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat si ošetření po celkové koupeli těla. Pokožka by měla být ideálně bez chloupků. Chloupky by mohly vytvářet nežádoucí bariéru mezi aplikační hlavici a pokožkou. Přístroj nepoužívejte bezprostředně po oholení chloupků. Pokožka je příliš podrážděná. Použití přístroje naplánujte s odstupem několika hodin od holení.
2. Použití přístroje by mělo být vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Gel nemůže během použití vniknout do přístroje. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Ultrazvuk, radiofrekvence, EMS pulzy a MFIP pulzy se tak mohou na pleť lépe navázat. **Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.** Pro kvalitní přístrojové ošetření stačí základní sonogel bez přidaných aromat a barviv.
3. Aby všechny funkce pracovaly správně, baterie musí být dostatečně nabita. Jakmile se rozbliká indikace baterie, připojte přístroj k napájecímu kabelu.
4. Stiskněte dlouze tlačítko **ON/OFF/MODE**. Přístroj automaticky spustí program určený pro RUCE. Aktivní jsou technologie: **ULTRAZVUK, RADIOFREKVENCE, EMS, MFIP, MODRÉ SVĚTLO**. Výchozí intenzita výkonu je nastavena na úroveň 1. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ si můžete změnit působení výkonu. K dispozici je rozsah od 1 do 5.
5. Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF/MODE** přístroj přepnete do programu určený pro NOHY. Aktivní jsou technologie: **ULTRAZVUK, RADIOFREKVENCE, EMS, MFIP, ČERVENÉ SVĚTLO**. Výchozí intenzita výkonu je nastavena na úroveň 1. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ si můžete změnit působení výkonu. K dispozici je rozsah od 1 do 5.
6. Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF/MODE** přístroj přepnete do programu určený pro PAS, BOKY A HÝŽDĚ. Aktivní jsou technologie: **ULTRAZVUK, RADIOFREKVENCE, EMS, MFIP, FIALOVÉ SVĚTLO (ČERVENÉ + MODRÉ)**. Výchozí intenzita výkonu je nastavena na úroveň 1. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ si můžete změnit působení výkonu. K dispozici je rozsah od 1 do 5.

- 7.** Přístroj má nastavený časovač v délce 10 minut. Na uplynutí této doby vás upozorní zvukový signál. Pokud na přístroji nestisknete žádné tlačítko, přístroj se v průběhu následujících 10 sekund automaticky vypne. Jakmile od zahájení použití přístroje uplyne 5 minut, zazní krátká zvuková signalizace.
- 8.** Ošetřete vybrané partie těla. Aplikační hlavici pohybujte po vybrané partii krouživými nebo táhlými pohyby. Použít můžete také metodu tzv. razítkování. Aplikační hlavici na jednom místě přidržte několik sekund a poté se přesuňte o kousek vedle. Více o způsobech ošetření těla naleznete v pasáži: **MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA**.
- 9.** Vždy dbejte na to, aby kontaktní plochy aplikační hlavice ve spodní části přístroje byla v plném kontaktu s pokožkou (pokud to reliéf pokožky dovolí). Zajistíte tak maximální efektivitu ošetření.
- 10.** Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF/MODE**.
- 11.** Po skončení používání přístroje otřete zbytky kontaktního gelu z těla a aplikační hlavice přístroje. Více o péči aplikační hlavice naleznete v pasáži: **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**.
- 12.** Po ošetření přístrojem můžete na pleť nanést hydratační kosmetický krém a nechat přirozeně zaschnout.

DÉLKA & FREKVENCE POUŽITÍ PŘÍSTROJE

V úvodu návodu k obsluze jsme vám popsali, na jaké tělesné partie se můžete s přístrojem zaměřit. Nyní se vám pokusíme vysvětlit, jak si co nejlépe naplánovat používání přístroje a jaká pravidla je vhodné dodržovat. Při použití přístroje vycházejte s následujícími pokyny:

- V jeden den je možné ošetřit pouze jednu partii těla. Párová oblast těla je brána jako jedna partie. V jeden den se tak můžete zaměřit břicho nebo paže (pravá i levá ruka dohromady) nebo vnitřní strana stehen (pravá i levá noha dohromady).
- Použití přístroje v daný den by nemělo přesáhnout 20 minut.
- Přístroj je možné použít maximálně 3x za týden (to platí na stejné i různé partie těla).
- Optimální frekvence použití je tedy např. pondělí, středa, sobota.
- Tento týdenní program zopakujte v rámci jednoho měsíce.
- Při používání přístroje v průběhu tří týdnů doporučujeme čtvrtý týden celý vynechat.
- Poté opět pokračujte v používání přístroje v rámci tří týdenního cyklu.

TEST PLETI

Každý jsme originál. Existuje celá řada typů pleti. Přestože je používání přístroje naprosto bezpečné, je doporučeno provést test pleti, zda použití nevyvolá případné nežádoucí podráždění pleti či alergickou reakci.

1. Naneste na pleť tenkou vrstvičku vodivého gelu (např. na část stehna nebo lýtky).
2. Ošetřete malou část pleti pomocí libovolného programu alespoň v délce 5 minut.
3. Pokud se v průběhu 24 hodin na pleti neobjeví jakékoliv velmi nestandardní zbarvení vlivem alergické reakce, přístroj můžete bez obav používat dle instrukcí v tomto návodu k obsluze (mírné zarudnutí pleti je stále zcela běžný průvodní jev).



DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

- BeautyRelax BR-2833 CELLUFORM JUJY je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní provoz je základní předpoklad pro používání přístroje uživatelem v domácím prostředí. Používání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- BeautyRelax BR-2833 CELLUFORM JUJY je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
- Ošetření by mělo být vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Ultrazvuk, radiofrekvenční vlny, EMS a MFIP pulzy získají lepší schopnost navázat se na pleť. Pokud je to jen možné, vyhněte se vodivému gelu s přidanými aromaty nebo barvivy. Pleť citlivějších uživatelů by nemusela zareagovat pozitivně.
- **Přístroj disponuje dostatečným rozsahem výkonu. K dispozici je celkem 5 úrovní. Vždy začínějte na nejnižší úrovni číslo 1. Přístroj je určen pro ošetření vybraných partií těla. Každá partie může mít jinou citlivost. Proto je možnost výběru výkonu od 1 do 5. Přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností. Pokud by nebyl přístroj dostatečně výkonný, nebylo by možné dosáhnout požadovaných výsledků. Úroveň nastavení výkonu by vám na pleti neměla působit pocity za hranou snesitelnosti. Technologie přístroje můžete vnímat na pleti různým způsobem. Pokud byste na pleti nevnímali vůbec nic, nebylo by možné hovořit o dostatečné účinnosti přístroje.**
- Aplikační hlavici se po pleti můžete pohybovat různými způsoby. Krátkými táhlými pohyby nebo krouživými pohyby. Využít můžete i metodu tzv. razítkování. Aplikační hlavici na jednom místě přidržte několik sekund a poté se přesuňte o kousek vedle.
- Při používání červeného světla není třeba ochranných pomůcek zraku. Přesto je striktně doporučeno nedívat se při používání přímo do zdroje světla. Letmý pohled nevadí. Světlem si však záměrně do očí nesvíťte.
- V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat: Tel: 737 196 160
Email: mh@santadria.cz

MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA

UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE



PAŽE

Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na ruku. Aplikační hlavicí přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně ošetřete vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujete se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.



Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem ošetřete postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.

PAS & BŘÍŠKO

Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživém pohybu. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.

HÝŽDĚ

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto ošetřit celou oblast hýždí.

STEHNA & LÝTKA

Aplikační hlavicí se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavicí se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavicí se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete ošetřit přední i zadní část končetiny.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Použití přístroje je vždy spojeno s aplikací sonogelu. Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Pokud přístroj používá více osob, je třeba provést dezinfekci povrchu aplikační hlavice. Ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost. Přístroj neomývejte pod proudem tekoucí vody.

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj není možné zapnout.	Baterie je vybita.	Baterii nabijte pomocí kabelu, který je součástí balení.
Přístroj se po několika minutách automaticky vypne.	Aktivoval se časovač.	Časovač je nastaven na 10 minut. Pokud nestisknete tlačítko, pro další používání přístroje je třeba přístroj znovu zapnout.
Necítím působení EMS pulzů nebo MFIP pulzů.	Pokožka je příliš suchá.	Naneste na pleť větší množství kontaktního gelu.
	Aplikační hlavici se pohybujete příliš rychle.	Doporučená rychlost pohybu 2-5cm za sekundu (orientačně).
	Aplikační hlavice není v plném kontaktu s pletí.	Kontaktní plochy aplikační hlavice by měly být v co nejlepším kontaktu s pletí.
Radiofrekvence příliš pálí.	Zůstáváte s přístrojem na jednom místě příliš dlouho.	Doporučená rychlost pohybu 2-5cm za sekundu (orientačně).
	Vysoká intenzita.	Snižte intenzitu výkonu níže nebo na nejnižší stupeň 1.
	Kontaktní elektrody aplikační hlavice nejsou v plném kontaktu s pletí.	Kontaktní plochy aplikační hlavice by měly být v co nejlepším kontaktu s pletí.
EMS pulzy jsou příliš intenzivní.	Je nastavena příliš vysoká úroveň.	Snižte intenzitu výkonu níže nebo na nejnižší stupeň 1.
MFIP pulzy jsou příliš intenzivní.	Je nastavena příliš vysoká úroveň.	Snižte intenzitu výkonu níže nebo na nejnižší stupeň 1.

SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE

Při neinvazivním přístrojovém ošetření tukové tkáně je doporučeno v ideálním případě podpořit činnost lymfatického systému těla. Stejným způsobem nabízí podobný typ ošetření i profesionální masážní studia. Lymfatická masáž a podpora krevního oběhu významným způsobem napomáhá k odvodnění končetin a odplavení veškerých nežádoucích škodlivin z krevního řečiště. V rámci naší nabídky vám můžeme pro inspiraci doporučit následující produkty, které můžete s modelem BeautyRelax BR-2833 CELLUFORM JUJY efektivně kombinovat:



Masážní přístroj BeautyRelax
Vacuform Premium



Masážní přístroj BeautyRelax
Vacuform



Masážní přístroj na vakuovou drenáž
BeautyRelax Vacuform Exclusive



Masážní přístroj BeautyRelax
Lymfopress Premium

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro ošetření jednotlivými technologiemi přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.



Jsem silně obézní. Mám vysokou nadváhu. Je pro mě použití přístroje BeautyRelax CELLUFORM JUJY spásné řešení?

Bohužel nikoliv. V tomto případě vám za výše uvedených okolností přístroj používat nedoporučujeme. Estetickým přístrojem není možné kompenzovat nezdravý životní styl, při kterém s opakující se pravidelností konzumujete z dlouhodobého hlediska více kalorií, než je tělo schopné metabolizovat. Pokud trpíte vysokou nadváhou, doporučujeme se obrátit na svého praktického lékaře nebo výživového poradce a řešit proces hubnutí pod odborným dohledem.

Pro koho je tedy přístroj BeautyRelax CELLUFORM JUJY vhodný?

Estetický přístroj je vhodný pro každého, kdo je vnitřně přesvědčený, že skutečně má vážný zájem zapracovat na svém vzhledu. I přes veškerou snahu se nedaří redukovat na vybraných částech těla nežádoucí vrstvu tukové tkáně. Přesto je ochoten vyzkoušet neinvazivní cestu a vyhnout se chirurgickému zákroku pomocí skalpelu.

Je třeba v průběhu používání přístroje nějakým způsobem upravit jídelníček?

Rozhodně ano. Pokud je to jenom možné, vyhněte se v den použití přístroje konzumaci skutečně těžkých mastných jídel. Máme na mysli zejména pokrmy, které byly připraveny technikou smažení na oleji. Rovněž doporučujeme vyhnout se slazeným nápojům. V ideálním případě konzumovat pouze čistou vodu nebo vodu ochucenou o šťávu z čerstvého ovoce. Odlehčením jídelníčku výrazně pomůžete svému organismu v období používání přístroje.

Je ošetření technologiemi přístroje BeautyRelax CELLUFORM JUJY bolestivé?

Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné. Při použití programu EMS a MFIP můžete cítit na pokožce pocity připomínající mravenčení až lehké brnění. Průvodním jevem působení radiofrekvence je pocit tepla. Pokud je pro vás mravenčení příliš intenzivní, pracujte s nejnižší hodnotou číslo 1.

Jakých výsledků je možné dosáhnout?

Výsledek je výrazně ovlivněn několika faktory. Uvolněný tuk musí tělo zpracovat. To, jak rychle jej zpracuje, závisí především na rychlosti metabolismu, typu vašeho tuku (zda je prorostlý až do svalové tkáně), stavu lymfatického systému nebo životosprávy. Estetický přístroj vnímejte jako užitečný nástroj, který vám napomůže ve vašem úsilí vypadat lépe. Pro dosažení vysněných cílů je třeba upravit životosprávu a zvýšit pohyb (mluvíme stále o lehké pohybové aktivitě, žádná extrémní fyzická zátěž, na kterou nejste případně zvyklí). Je to důležité, aby procesy, které estetický přístroj ve vašem těle nastartuje, mohly úspěšně a efektivně proběhnout.

Proč je kladen důraz na péči o kontaktní plochy aplikační hlavice po každém použití?

Kontaktní plochy je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu a pečlivě dezinfikovat po každém jednotlivém použití. Jednou za čas je ideální pomocí spreje na bázi alkoholu. Zabráníte tak možnosti šíření bakterií a zajistíte maximální hygienu provozu. Při používání přístroje více osobami je nezbytné dezinfekci pomocí spreje provádět po každém použití. Aplikační hlavici nezapomeňte důkladně vysušit pomocí hadříku. Násobně tím prodloužíte její životnost.

Může přístroj používat více osob?

Ano. Je to možné, ale za dodržení určitých podmínek. Věnujte zvýšenou pozornost zejména dezinfekci aplikační hlavice. Zabráníte přenosu bakterií či případně kožních chorob. Pro dezinfekci použijte ideálně alkoholový roztok ve spreji. Povrch aplikační hlavice vždy důkladně osušte.

V jakém stavu by se měla pleť nacházet těsně před použitím přístroje?

Pokožka by měla být co nejvíce čistá. Zbavena všech povrchových nečistot. Ideální je načasování po koupeli. Zde bychom rádi zdůraznili, že není vhodné pleť příliš nahřát horkou vodou.

Jaké přípravky je vhodné použít po ošetření přístroje?

Pleť je vhodné po použití přístroje dostatečně hydratovat. Doporučujeme použít běžný hydratační krém. Pleť potřebuje dostatečný přísun vláhy pro její regeneraci. Minimálně v den přístrojového ošetření je vhodné se vyhnout kosmetickým procedurám, jako např. hloubkové čištění pleti diamantovou mikrodermabrazí nebo zahřátí pleti horkou párou. Po použití přístroje je pleť mírně podrážděna a může zčervenat.

Jakým způsobem je možné působení radiofrekvence vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pleť proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis a k tukové tkáni radiofrekvenční vlny. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přesné zacílení do vrstvy dermis a tukové tkáně o specifické frekvenci a výkonu.

Může aplikační hlavice povrch pleti poranit?

Při nesprávném použití přístroje může. Rozsah nastavení výkonu je záměrně upraven tak, aby byl schopen ošetřit celé spektrum uživatelů s různou citlivostí pleti a různou vrstvou tukové tkáně. Můžeme tedy považovat výkon přístroje za mírně „předimenzovaný“. Jedna z hlavních výhod přístroje je flexibilita použití se zaměřením a vybrané partie těla. Úprava dávkování výkonu umožňuje ošetření i velmi citlivých partií. Vyšší výkon nakopat pro větší plochy, kde je míra citlivosti na nižší úrovni. Estetický přístroj musí být schopen nabídnout dostatečný potenciál výkonu. V opačném případě by nebylo možné provést ošetření s vysokou efektivitou. Při dávkování výkonu je třeba vždy postupovat s maximální opatrností.

Proč nabízí přístroj více technologií? Existuje s ohledem na očekávané výsledky nějaký vzájemný vztah jednotlivých technologií, které pracují při použití přístroje současně?

Estetika těla, to není pouze snaha o cílenou redukci tukové tkáně. Lidské tělo může doprovázet celá řada nežádoucích jevů v podobě výskytu celulitidy, povislé pokožky se sníženou pružností, ochablé svaly. Každá technologie má svůj specifický význam. Technologie se vzájemně nevylučují. Při použití přístroje je možné programy vzájemně střídat. Velice zjednodušenou formou. Ultrazvukové vlny stimulují tukové buňky. Radiofrekvence působí ve dvou rovinách. Podpora tvorby vlastního kolagenu a stimulace tukových buněk. EMS pulzy aktivně posilují ochablou strukturu svalů. MFIP se snaží posílit

elastická vlákna ve vrstvě dermis. Červené světlo je z oblasti fotonové terapie jedno z nejpoužívanějších. Napomáhá potlačit tvorbu pigmentu. Modré světlo pro antibakteriální účinky.

Je důležitý směr pohybu přístroje po pleti?

Určitě není. Nezáleží na tom, jestli budete na pleti „vytvářet“ kolečka nebo čárky. Klíčové je sledovat rychlost pohybu aplikační hlavičky po pleti a podle vnímání působení technologií upravit intenzitu. Ošetření by vám mělo být příjemné. Ne bolestivé. Pokud je intenzita vyšší, zkuste zrychlit pohyb hlavičky po pleti. Přesto určité vjemy budete v průběhu použití na pleti cítit. Bez toho by přístroj nebyl schopen garantovat jakýkoliv pozitivní estetický účinek.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních přístrojů. Přístroj neléčí obezitu nebo jakékoliv jiné onemocnění. Přístroj nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají v redukci podkožního tuku, potlačení projevů celulitidy a zvýšení pružnosti pleti.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. Aby pro vás bylo používání přístroje maximálně bezpečné, dbejte pečlivě všech pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Je přístroj vodotěsný?

Žádná část přístroje není určena pro mytí pod tekoucí vodou. Použití sonogelu nepředstavuje pro aplikační hlavičku žádný problém.

PÁR VĚT ZÁVĚREM

V dané cenové kategorii patří přístroj BeautyRelax CELLUFORM JUJY mezi mé nejoblíbenější. Po vzhledové stránce se mi moc líbí. Konstrukce přístroje vychází z posledních trendů v oblasti estetiky. Hladké tvary. Nikde nenajdete žádné ostré hrany. Nízká hmotnost, ergonomický design, optimální velikost aplikační hlavičky. Přístroj se skvěle drží v ruce. Neméně důležitá je však vhodně zvolená kombinace technologií. A u toho bych se trochu pozastavil. Ultrazvuk je naladěn na frekvenci 80KHz. Optimální frekvence se skvělým poměrem účinnosti na tukovou tkáň šetrnost pro krevní cévy a kapiláry. Radiofrekvence skvěle podpoří pružnost pleti. Rovněž dokáže zacílit na tukové buňky, které díky správně nastavené funkci optimálně zahřeje. Aktuálně velmi populární v oblasti estetiky funkce MFIP. Snížení pružnosti pleti. Projevy celulitidy. Estetické defekty, na které je technologie MFIP vysoce efektivní. Líbí se mi také moderní způsob nabíjení pomocí kabelu, který se magneticky spojí s kontaktními plochami přístroje. Sečteno - podtrženo. Model BeautyRelax CELLUFORM JUJY je moderní estetický přístroj, který vám obrazně řečeno pomůže postupně spalovat „JOULY“ (energii uloženou v tukových buňkách). Pravidelným používáním přístroje můžete dosáhnout opravdu skvělých výsledků. S přístrojem BeautyRelax CELLUFORM JUJY máte jistotu, že používáte opravdu moderní technologie.



Martin Hrbek
www.beautyrelax.cz

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Jakmile je baterie vybita, ikona indikace stavu baterie se rozblíká.

Postup nabíjení:

1. Magnetický konec nabíjecího kabelu připojte ke dvěma kontaktním plochám na boční straně přístroje.
2. Druhý konec kabelu připojte k síťovému adaptéru, který je součástí balení.
3. Délka nabíjení závisí na stavu a kondici baterie.
4. Průběh nabíjení indikuje červená ikona indikace nabíjení.
5. Jakmile je baterie nabita, ikona změní barvu z červené na bílou.
6. V průběhu nabíjení není možné přístroj používat.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Masážní přístroj na formování postavy

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax Celluform Juzy BR-2833**

EAN **8594166120501**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno
Datum vydání: 1.10.2022

.....
Martin Hrbek, jednatel