

NÁVOD K OBSLUZE

Estetický přístroj na formování postavy

BeautyRelax BR-2720

CELLUFORM ULTIMATE



OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	5
PROBLEMATIKA TUKOVÉ TKÁNĚ	7
TUKOVÁ BUŇKA	7
ULTRAZVUK & RADIOFREKVENCE	8
URČENO PRO VŠECHNY TYPY POSTAV	8
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	10
METODY REDUKCE VRÁSEK	10
UPOZORNĚNÍ	11
POUŽITÍ SONOGELU	11
KONTRAINDIKACE	12
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	12
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	12
LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK HIFU	13
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	16
RADIOFREKVENCE [RF]	16
ULTRAZVUKOVÉ VLNY [HIFU]	16
EMS [EMS]	17
ČERVENÉ SVĚTLO [630NM]	17
HLAVNÍ VÝHODY	18
CO MŮŽETE OČEKÁVAT	18
TECHNICKÉ PARAMETRY	18
OBSAH BALENÍ	18
POPIS PŘÍSTROJE	19
POPIS DISPLEJE	21
OVLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	22
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	24
DÉLKA & FREKVENCE POUŽITÍ - TĚLO	25
DÉLKA & FREKVENCE POUŽITÍ - OBLIČEJ	25
TEST PLETI	26
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	27
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA	28
DOPORUČENÁ TECHNIKA POUŽITÍ PŘÍSTROJE	33
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	35

OBSAH:

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	36
NABÍJENÍ BATERIE	36
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	36
SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE	37
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	38
PÁR VĚT ZÁVĚREM	41
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	42
CERTIFIKACE	42
DOVOZCE	42
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	43

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Estetický přístroj pro neinvazivní ošetření vybraných částí těla pracuje s technologiemi, které jsou bezbolestné a bezpečné. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost splňuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených bezpečnostních norem. Aby bylo možné efektivně stimulovat podkožní tukovou tkáň, pracuje přístroj s určitým výkonem. Pokud nebudete postupovat dle uvedených pokynů, nebudete ctít upozornění a výčet kontraindikací, můžete si váš zdravotní stav v krajním případě negativně ovlivnit. Na druhou stranu nemějte z používání přístroje obavu. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny používání v domácích podmínkách bez dohledu erudované osoby z oblasti zdravotnictví.

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie masážních/estetických přístrojů. Nejedná se o zdravotnický prostředek. **Neslouží kléčbě obezity ani jiných souvisejících omezení.** Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají v redukci podkožního tuku a zlepšení pružnosti pleti.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní ošetření. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky neprotrhne kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost adaptéru a všech elektronických součástí.
- Ošetření je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (sonogel). Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Technologie přístroje získají lepší schopnost navázat se na pleť. S množstvím gelu na pleti určitě nešetřete. Jde o důležitou součást pro kvalitní provedení ošetření pleti.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.

Tým BeautyRelax.cz




PROBLEMATIKA TUKOVÉ TKÁŇE

Tukové buňky patří mezi největší buňky, které se nachází v lidském těle. Jejich hlavním smyslem je vytvářet zásobu energie. Kromě ukládání energie slouží bílá tuková tkáň také jako tepelná izolace a ochrana vnitřních orgánů. Tuková tkáň se nejčastěji nachází v podkoží. Tuková tkáň patří mezi tkáně vazivové. Mezi jednu z důležitých vlastností tukové tkáně je kumulace tuku aktivně vytvořeného ze sacharidů a mastných kyselin v buňkách. Proces ukládání a odbourávání tuku je řízen hormonálně i nervovými podněty. Bílá tuková tkáň je tvořena **tukovými buňkami** s velkými tukovými kapénkami obklopenými prstencem cytoplazmy (tuková vakuola). Jádro je umístěno na periferii buňky. Uložený tuk je polotekutá konzistence a sestává převážně z triacylglycerolů a esterů cholesterolu. U štíhlých jedinců zaujímá kolem 20% tělesné hmotnosti, u obézních ale může tvořit až 50% celkové váhy.



grafická animace shluku tukových buněk

TUKOVÁ BUŇKA

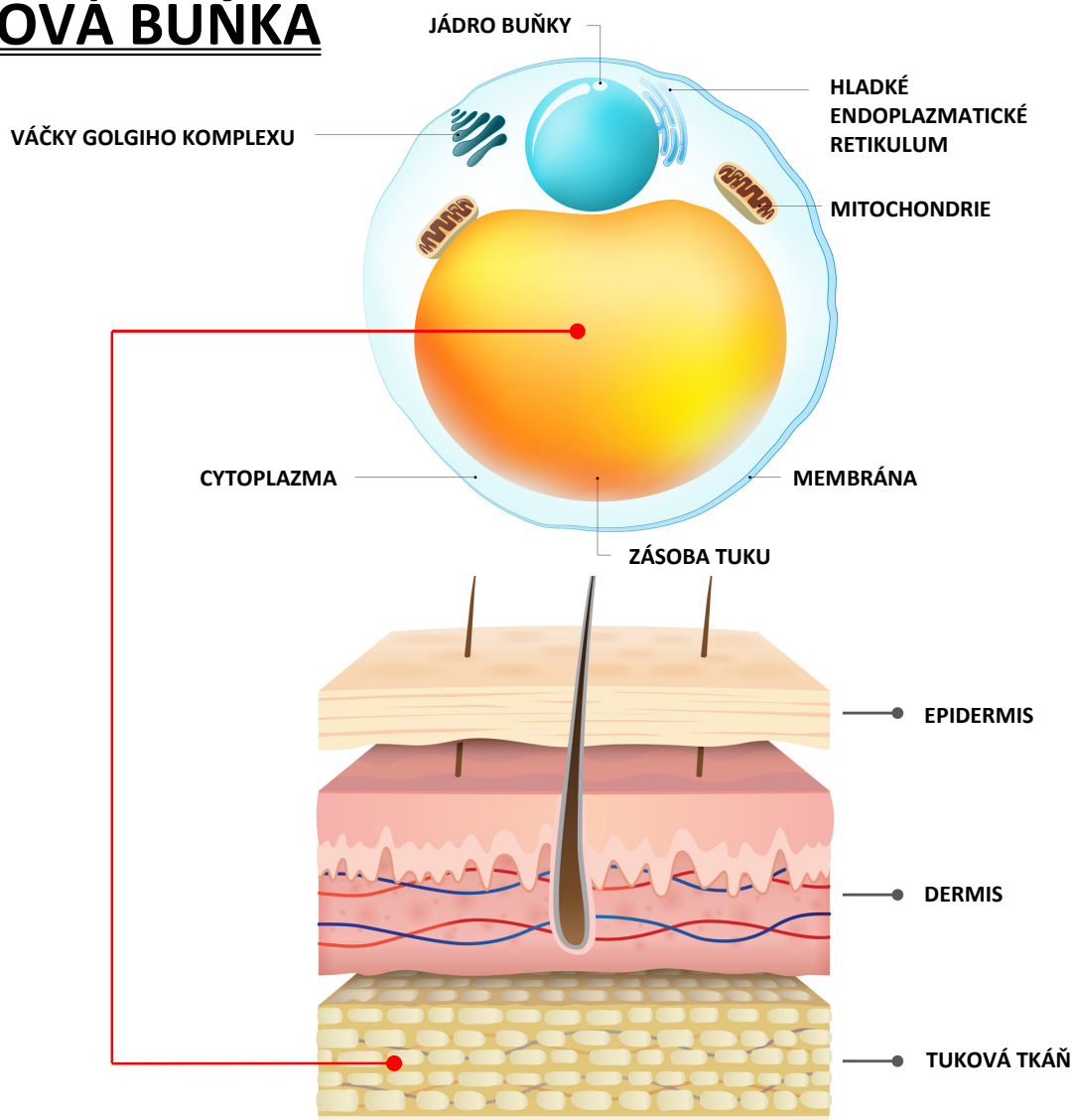


ULTRAZVUK & RADIOFREKVENCE

Hlavním smyslem použití estetických přístrojů je přímé zacílení na tukové buňky, které se shlukují v tukové tkáni. Estetický přístroj **BeautyRelax Celluform Ultimate** kombinuje hned dvě moderní technologie – **radiofrekvenční vlny RF** a inovativní **ultrazvukové vlny HIFU**. Duální ošetření představuje optimální kombinaci stimulace tukových buněk. Působením přesně zacílené radiofrekvenční energie dochází k termálnímu efektu. Zrychluje se buněčný metabolismus. U části tukových buněk je narušena jejich struktura. Následuje rozpad na jednotlivé částice. Efekt formování postavy spočívá ve snížení množství tukových buněk a zmenšením jejich objemu. Působením ultrazvukových vln dochází ke štěpení triglyceridů na mastné kyseliny a glycerol. Glycerol je rozpustný ve vodě a je tak snadno absorbován do oběhového systému. Mastné kyseliny zpracují játra způsobem, který je pro tělo přirozený a jemu vlastní.



URČENO PRO VŠECHNY TYPY POSTAV

Používání přístroje BeautyRelax je vhodné pro všechny typy postav. Pro muže i ženy. Ať je predispozice většího ukládání tuku na jakékoliv partii. Výjimku tvoří osoby, na které se vztahuje některý ze stavů uvedených v soupisu kontraindikací.

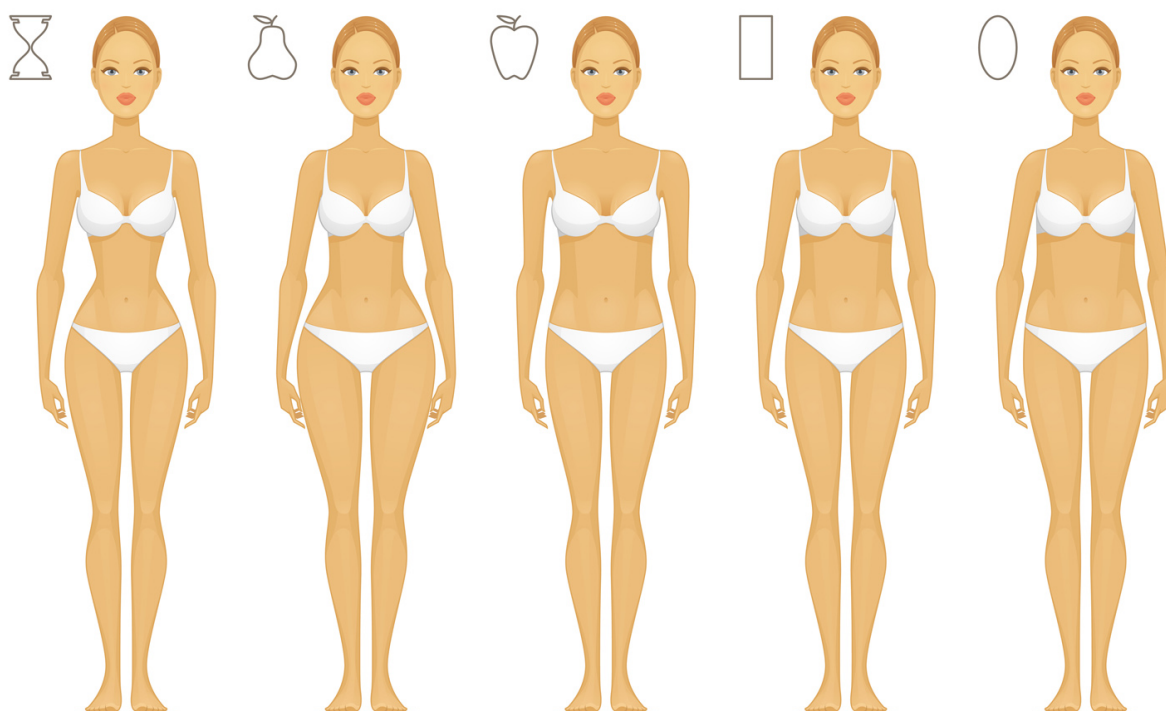



PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojové ošetření pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

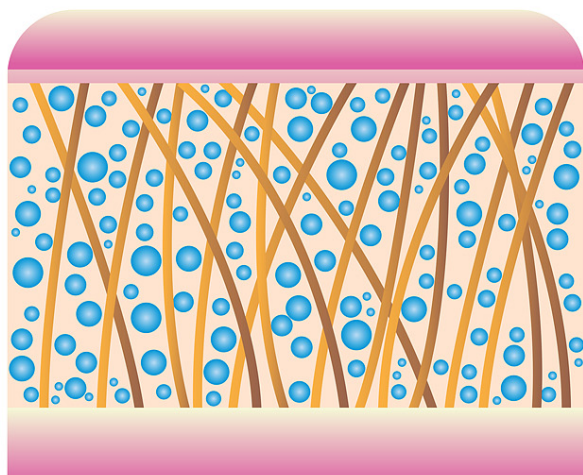

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

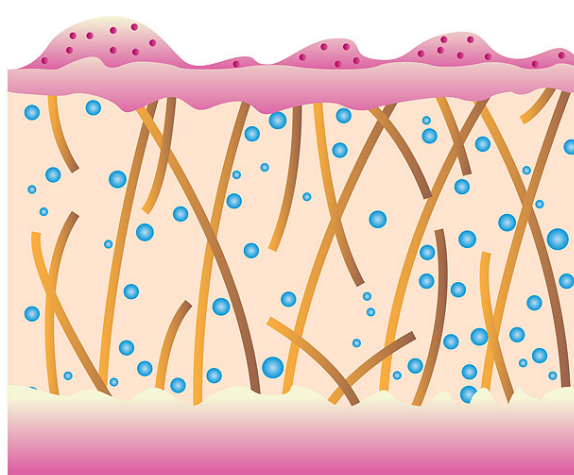

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Aplikční gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Určitě s ním během používání přístroje nešetřete. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Radiofrekvence, EMS pulzy a HIFU ultrazvuk se mohou na pleť lépe navázat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky v kombinaci s přístrojem.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (platí pouze pro oblast použití přístroje)
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Oblast štítné žlázy
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Locket
- Zápěstí
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ


- Obličej
- Podbradek
- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Stehna
- Zadeček
- Lýtko



Poznámka: párová oblast těla je brána jako jedna partie (pravé a levé lýtko = jedna partie)


LYMFATICKÉ UZLINY – ULTRAZVUK HIFU

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **snažte vyhnout** těmto oblastem lymfatických uzlin. Letmý dotyk nevadí. Stálou stimulaci těchto uzlů nedoporučujeme. Uzly jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

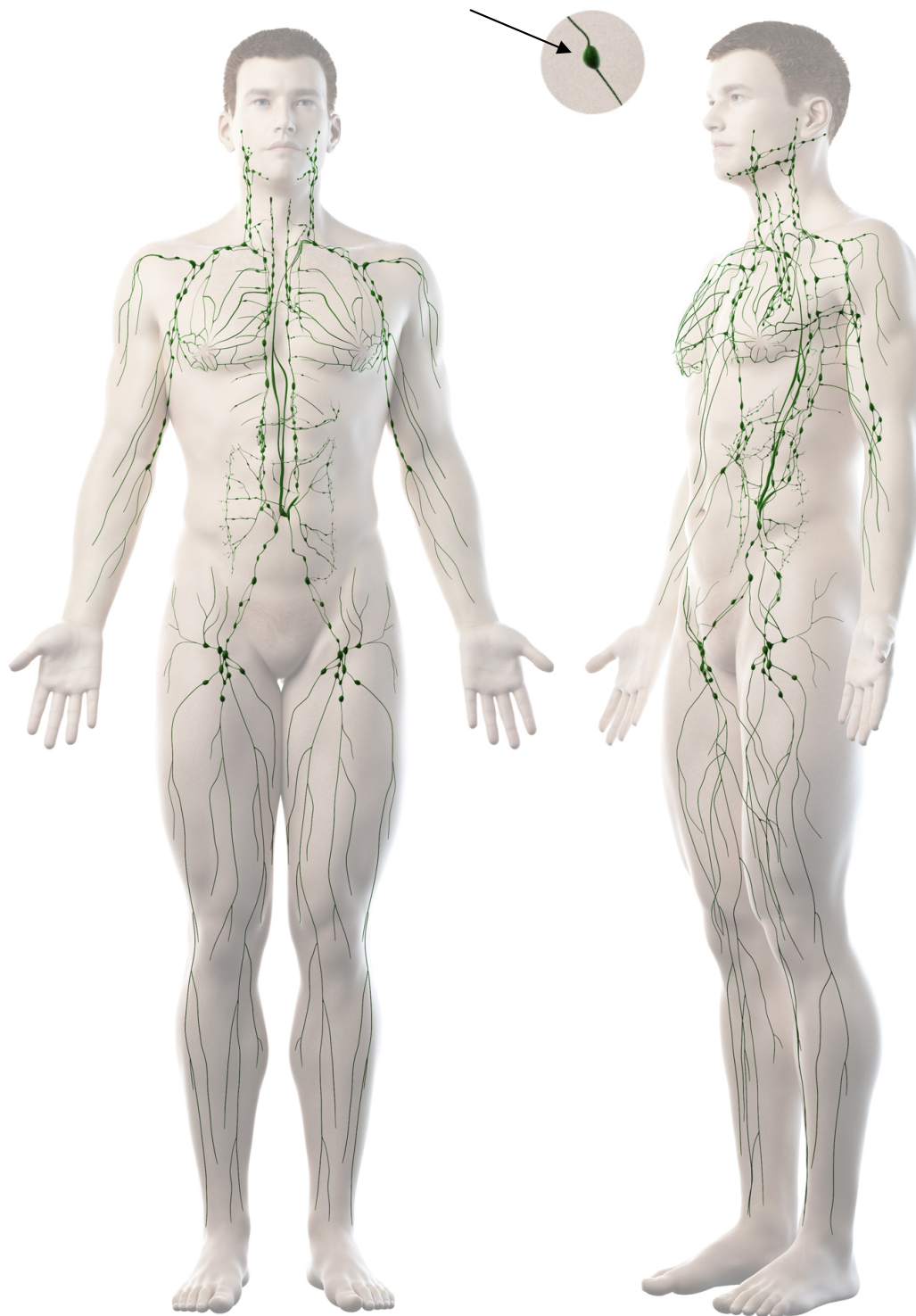


LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK HIFU

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **snažte vyhnout** těmto oblastem lymfatických uzlin. Letmý dotyk nevadí. Stálou stimulaci těchto uzlů nedoporučujeme. Uzly jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

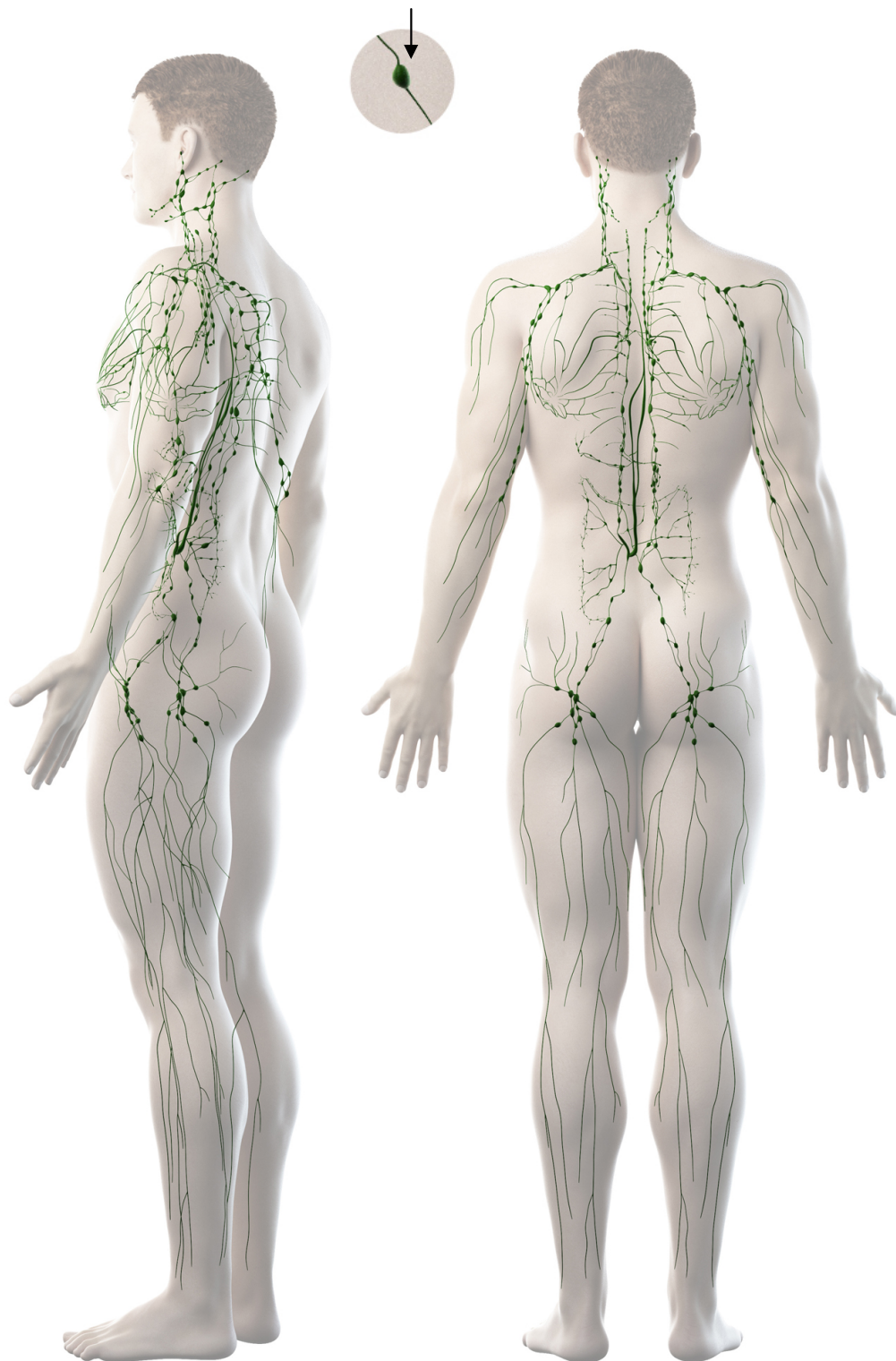

LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK HIFU

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **snažte vyhnout** těmto oblastem lymfatických uzlin. Letmý dotyk nevadí. Stálou stimulaci těchto uzlů nedoporučujeme. Uzly jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

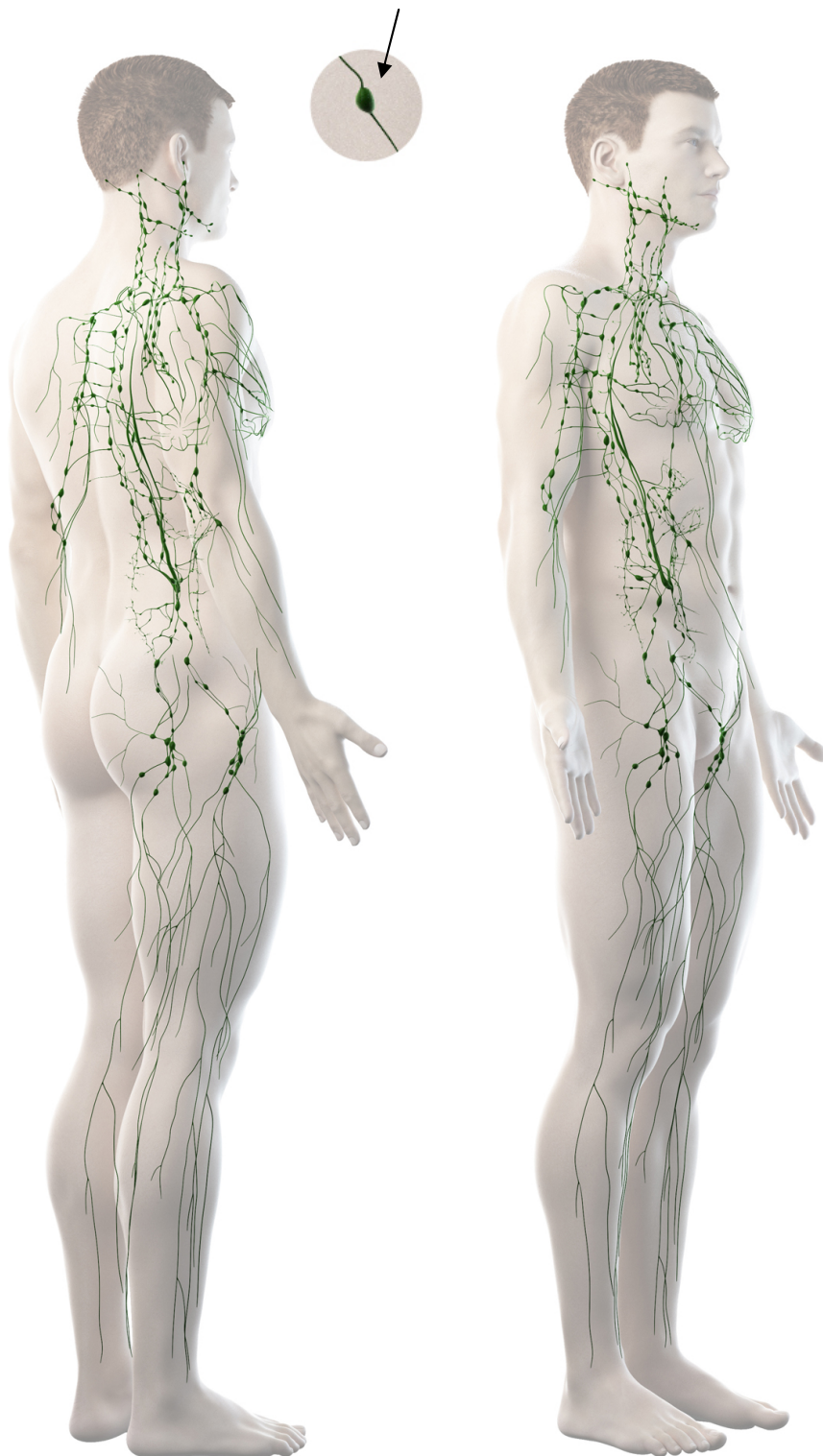

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Oblíbené technologie z oblasti neinvazivní estetiky v malém kompaktním provedení. Představujeme absolutní novinku z kategorie přístrojů pro osobní péči model **BeautyRelax Celluform Ultimate**. Využívá technologie srovnatelné s velkými přístroji v estetických studiích. Hlavní funkcí modelu **BeautyRelax Celluform Ultimate** je cílené formování postavy se zaměřením na redukci podkožního tuku. Na tukovou tkáň působí díky multifunkční aplikační hlavici ultrazvukovými vlnami HIFU, radiofrekvencí RF, elektrickými mikropulzy EMS a červeným fotonovým světlem. Unikátní zakřivení přístroje usnadňuje snadné ošetření i hůře dostupných míst. Používejte profesionální technologie v pohodlí domova!

RADIOFREKVENCE [RF]

Radiofrekvenční vlny získaly v oblasti estetiky za posledních několik let obrovskou oblibu. Mezi jeho hlavní výhody patří vysoká míra šetrnosti a efektivity. Aplikátor po přiložení na ošetřovanou oblast uvolňuje energii se zcela specifickou frekvencí a rozsahem výkonu. U modelu BeautyRelax Celluform Ultimate je radiofrekvence naladěna do frekvence 2MHz. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis a tukové tkáni. Dodaná energie aktivuje remodelaci elastických vláken a podporu tvorby kolagenu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Radiofrekvence zároveň aktivně stimuluje tukové buňky s cílem uvolnění energie, kterou následně tělo zpracuje přirozenou cestou. Buňky zmenší svoji velikost a tím dochází ke zmenšení rozměrů tukové tkáně. Tohoto procesu je možné dosáhnout pravidelným používáním za podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze. Projevem působení radiofrekvence je pocit vnímání tepla. Nejedná se však o teplo, které by ohřívalo vaši pleť aplikační hlavicí, která by se zahřála. Teplo můžete vnímat na povrchu pleti, které však proniká dále do vrstvy dermis a dále k tukové tkáni. Teplo způsobuje radiofrekvenční vlnění. Radiofrekvence má tedy dvě základní klíčové vlastnosti - aktivní stimulace tukové tkáně a zvýšení pružnosti pleti.



ULTRAZVUKOVÉ VLNY [HIFU]

Ultrazvukové vlny si díky svým vlastnostem našly v oblasti estetiky své stálé místo. Přístroje s ultrazvukovými vlnami mohou efektivně vyčistit obličej nebo také aktivně stimulovat tukovou tkáň. Při různých frekvencích dosahují různých vlastností. Frekvence ultrazvuku je u modelu Celluform Ultimate naladěna do hodnoty 3MHz. Jako jeden z prvních však nabízí zcela inovativní úpravu ultrazvukových vln v podobě zvýšení koncentrované proudy. Plocha, která generuje ultrazvukové vlny je menší ve srovnání s přístroji obdobného typu. Zvýšená koncentrace přispívá k maximálnímu zacílení na tukovou tkáň. Použití přístroje s ultrazvukovými vlnami typu HIFU přináší efektivnější stimulaci tukových buněk.




EMS [EMS]

Kontaktní plochy kuliček umístěné na aplikační hlavici přístroje přenáší při kontaktu s pletí jemné elektrické mikropulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo ke svalům. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily účinné, ale zároveň bezbolestné ošetření pleti. Dochází ke kontrakci svalů a tím jejich posílení. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. Docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Průvodním jevem působení technologie EMS je pocit mravenčení na pleti.



ČERVENÉ SVĚTLO [630NM]

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.

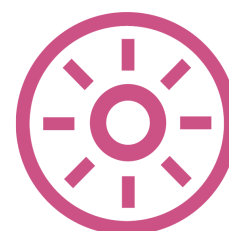

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

Červené světlo:

- podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni
- brání v tvorbě pigmentu

HLAVNÍ VÝHODY

- 4 pokročilé moderní technologie nejčastěji používané v estetických salonech
- Přístroj je určen pro použití na oblast obličeje a vybraných částí těla
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro snadné ošetření sebe sama
- Neinvazivní použití (žádná část přístroje nepronikne přes povrch pleti)
- Ošetření je k vašemu tělu maximálně šetrné
- Bezpečné používání v domácích podmínkách
- Bez jakýchkoliv vedlejších účinků

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

- Účinný nástroj v boji s problematickými partiemi vašeho těla
- Aktivní zacílení na vybrané partie s vyšším výskytem tukové tkáně
- Výrazné zlepšení pružnosti pleti
- Intenzivní podporu tvorby vlastního kolagenu
- Remodelaci elastických vláken

TECHNICKÉ PARAMETRY


- Technologie: radiofrekvence, ultrazvukové vlny kategorie HIFU, EMS pulzy, červené světlo
- Nastavení úrovně intenzity: ano, 3 úrovně
- Frekvence ultrazvuku: 3Mhz
- Frekvence radiofrekvence: 2Mhz
- Frekvence EMS pulzů: 90Khz
- Červené světlo o vlnové délce 625nm
- Časovač: ano, 5 minut pro každý program
- Napájení: vestavěná li-ion baterie
- Kapacita baterie: 1200mAh
- Nabíjení baterie: bezdrátové pomocí dobíjecího stojánu + USB kabel + 220V adaptér
- Rozměry: 13x9x9cm
- Hmotnost: 200g

OBSAH BALENÍ

- Estetický přístroj BeautyRelax BR-2720.
- Nabíjecí stojánek.
- USB kabel.
- Adaptér do sítě 220V.
- Návod k obsluze.

POPIS PŘÍSTROJE

Horní strana přístroje

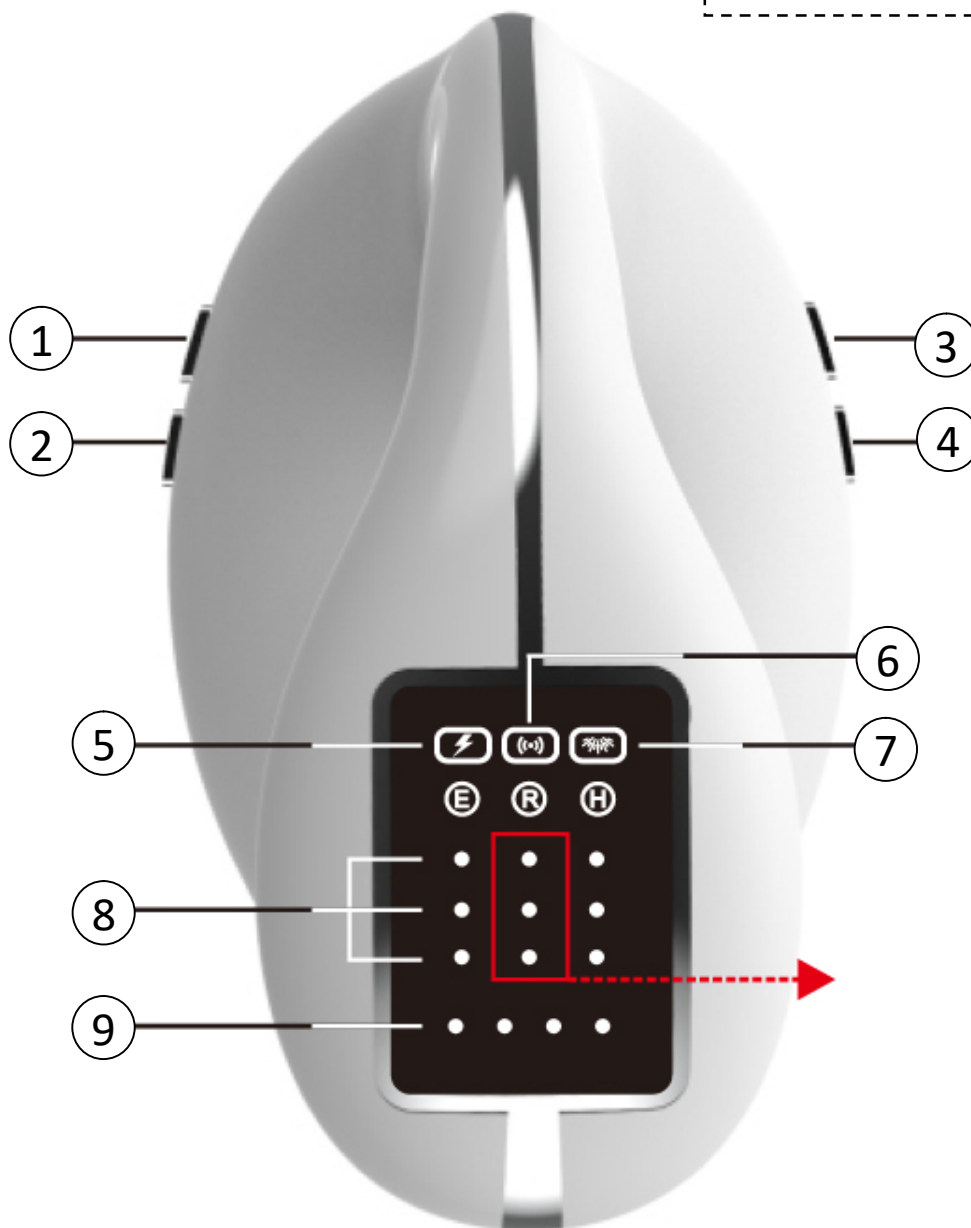

1. Tlačítko ON/OFF

2. Tlačítko MODE

3. Tlačítko ZVÝŠENÍ VÝKONU

4. Tlačítko SNÍŽENÍ VÝKONU

5. Symbol EMS mikropulzy

6. Symbol RF radiofrekvence


7. Symbol HIFU ultrazvukové vlny

8. Indikace nastaveného výkonu

9. Indikace zapnutí přístroje


POPIS PŘÍSTROJE

Spodní strana přístroje

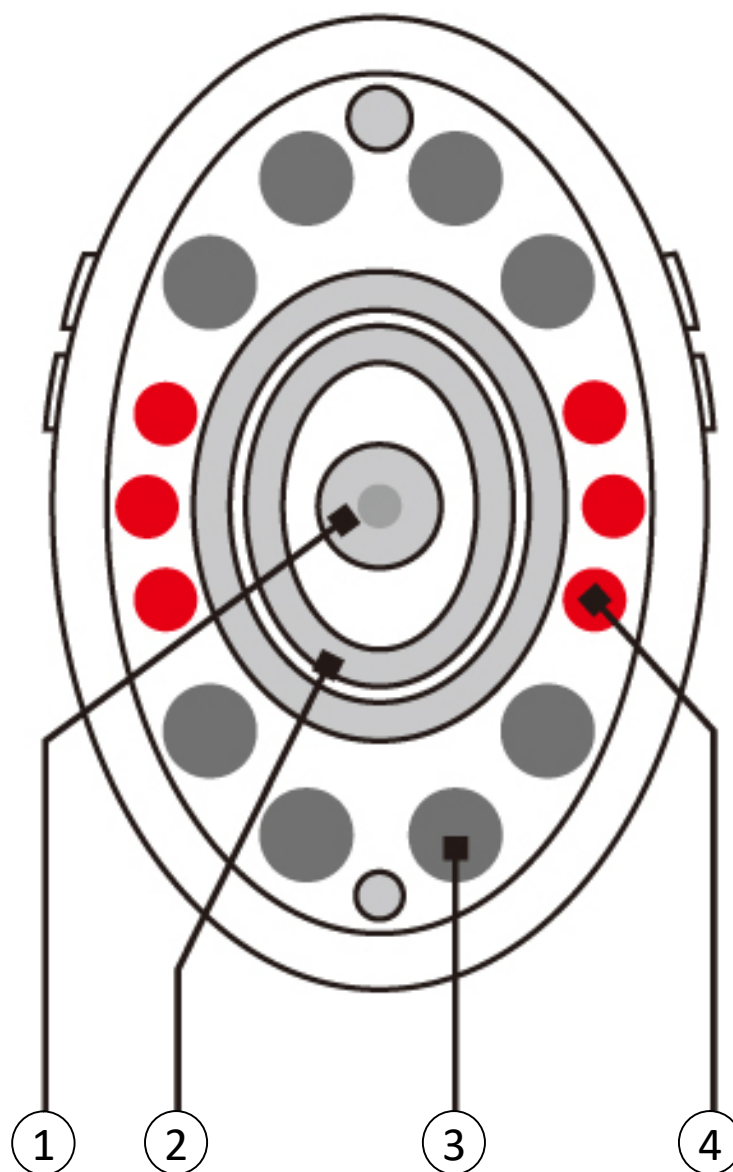

- 1. HIFU** ultrazvukové vlny
- 2. RF** radiofrekvence
- 3.** Masážní kuličky s **EMS** pulzy
- 4.** Světelná terapie - **červené světlo**

POPIS DISPLEJE

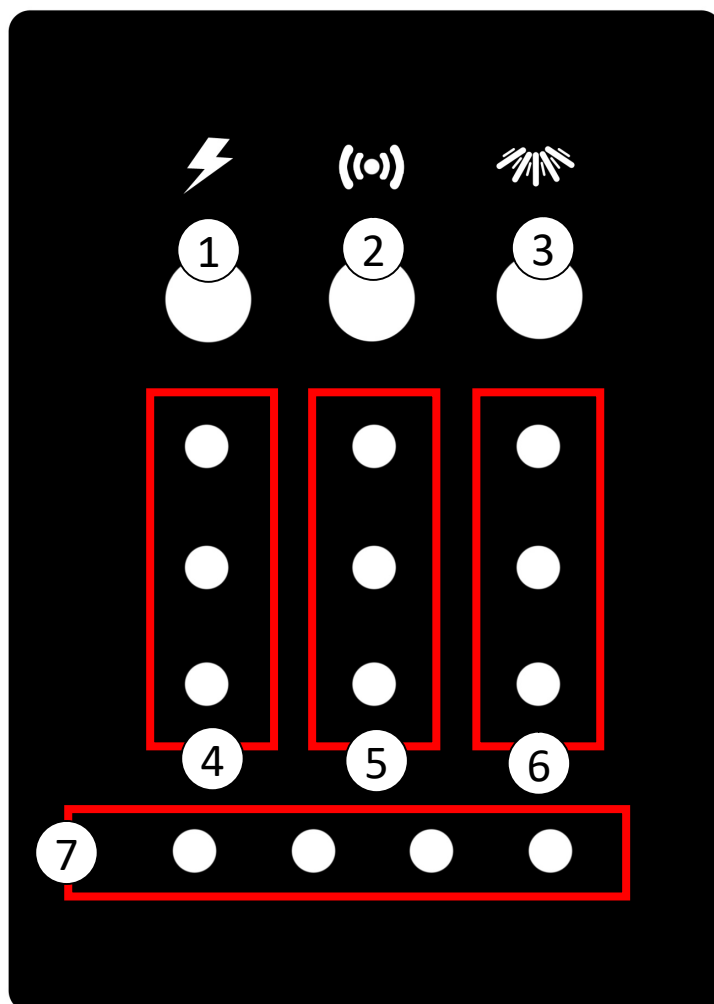

1. Indikace funkce **EMS** pulzů + červené světlo
2. Indikace funkce **RF** radiofrekvence + červené světlo
3. Indikace funkce **HIFU** ultrazvuku + červené světlo
4. Úroveň intenzity **EMS** pulzů
5. Úroveň intenzity **RF** radiofrekvence
6. Úroveň indikace **HIFU** ultrazvuku
7. Indikace činnosti přístroje

OVLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat si ošetření po celkové koupeli těla. Pokožka by měla být ideálně bez chloupků. Chloupky by mohly vytvářet nežádoucí bariéru mezi aplikační hlavicí a pokožkou.
2. Použití přístroje by mělo být vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavicí. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Radiofrekvence RF, ultrazvuk HIFU a EMS pulzy se tak mohou na pleť lépe navázat. **Nepoužívejte žádné jiné druhy kosmetických přípravků.**
3. Baterii přístroje nabíjejte výhradně pomocí příslušenství, které je součástí balení. V případě použití jiným typů, které nejsou kompatibilní, může dojít k nevratnému poškození baterie.
4. Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF (1)**. Automaticky se aktivuje program EMS. Výchozí úroveň intenzity je nejnižší na úrovni 1.
5. Pomocí tlačítek **ZVÝŠENÍ (3)** a **SNÍŽENÍ (4)** můžete upravit intenzitu výkonu působení EMS pulzů.
6. Krátkým stiskem tlačítka **MODE (2)** změníte program radiofrekvence RF.
7. Pomocí tlačítek **ZVÝŠENÍ (3)** a **SNÍŽENÍ (4)** můžete upravit intenzitu výkonu působení radiofrekvence RF.
8. Krátkým stiskem tlačítka **MODE (2)** změníte program ultrazvuku HIFU. Přístroj se nachází v pohotovostním režimu. Pro aktivaci funkce ultrazvuku HIFU stiskněte tlačítko **SNÍŽENÍ (4)**. Program ultrazvuku HIFU se aktivuje. Výchozí úroveň intenzity je 1. Působení funkce ultrazvuku HIFU je doprovázeno akustickým signálem - pípáním. Nejedná se o závadu, ale záměrná zvuková signalizace.
9. Pomocí tlačítek **ZVÝŠENÍ (3)** a **SNÍŽENÍ (4)** můžete upravit intenzitu výkonu působení ultrazvuku HIFU.
10. Každý program má automaticky přednastavený časovač v délce 5 minut. Po uplynutí této doby se přístroj automaticky vypne.

11. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF (1)**.
12. Ošetřete vybrané partie těla. Aplikační hlavici pohybujte po vybrané partii krouživými nebo táhlými pohyby. Využít můžete i metodu razítkování. Více o způsobech ošetření těla naleznete v pasáži: **MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA** a **METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU**.
13. Vždy dbejte na to, aby kontaktní plochy ve spodní části přístroje byla v plném kontaktu s pokožkou (pokud to reliéf pokožky dovolí). Zajistíte tak maximální efektivitu ošetření.
14. Po skončení používání přístroje otřete zbytky kontaktního gelu z těla a aplikační hlavice přístroje. Více o péči aplikační hlavice naleznete v pasáži: **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**.
15. Pokud potřebujete baterii nabít, následujte postup v pasáži: **NABÍJENÍ BATERIE**.
16. Po ošetření přístrojem můžete na pleť nanést hydratační kosmetický krém a nechat přirozeně zaschnout.



POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Jak jsme vám měli možnost uvést v úvodu tohoto návodu k obsluze. Použití přístroje je úzce spojeno s kontaktním gelem - tzv. sonogelem. Jedná se o stejnou praxi, která je používána v estetických studiích. Gel vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi kontaktními plochami aplikační hlavice přístroje a vaší pokožkou. V průběhu používání přístroje může gel z povrchu pleti postupně vysychat. Vrstvu gelu na pleti průběžně sledujte a v případě potřeby naneste na pleť další množství. Gel má tendenci z povrchu pleti postupně vysychat. Aplikační hlavice je na kontakt s gelem stavěna. Gelem nemůžete přístroji žádným způsobem uškodit.
- 2.** Postupné vysychání gelu v průběhu používání přístroje se nejčastěji projevuje tak, že můžete na povrchu pleti cítit vjem připomínající štípání. V tomto případě naneste na pleť další množství gelu.
- 3.** V kombinaci s použitím přístroje nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky. Snažte se rovněž vyhnout sonogelům s dalšími přidanými látkami. V kombinaci s technologií radiofrekvence by mohly vyvolat u citlivějších jedinců alergickou reakci na pleti.
- 4.** Pokud se s přístrojem teprve seznamujete, rozhodně nespěchejte. Snažte se vnímat, vaše tělo prostřednictvím povrchu pokožky vnímá působení jednotlivých technologií.
- 5.** Pro správný chod všech funkcí přístroje by měla mít baterie dostatečnou hladinu energie. Pro nabíjení používejte nabíjecí stojánek, který je součástí balení.
- 6.** Pokud se chcete zaměřit na vrásky na obličeji, zvýšení pružnosti pleti a vlastního kolagenu, dominantní mód, který používejte, je **RF**. Pokud se chcete zaměřit na stimulaci tukové tkáně v oblasti brady, rozdělte si čas ošetření mezi programy **RF** a **HIFU**.
- 7.** Produkt je určen pro všechny typy pleti s různou mírou citlivosti. Především v oblasti obličeji jsou partie s vyšší citlivostí a menším množstvím podkožního tuku. Vysokou variabilitu použití umožňuje možnost dávkování výkonu.

DÉLKA & FREKVENCE POUŽITÍ - TĚLO

V úvodu návodu k obsluze jsme vám popsali, na jaké tělesné partie se můžete s přístrojem zaměřit. Nyní se vám pokusíme vysvětlit, jak si co nejlépe naplánovat používání přístroje a jaká pravidla je vhodné dodržovat. Při použití přístroje vycházejte s následujících pokynů:

- V jeden den je možné ošetřit pouze jednu partii těla. Párová oblast těla je brána jako jedna partie. V jeden den se tak můžete zaměřit břicho nebo paže (pravá i levá ruka dohromady) nebo vnitřní strana stehen (pravá i levá noha dohromady).
- Použití přístroje v daný den by nemělo přesáhnout 25 minut.
- Při preferenci aktivní stimulace tukové tkáně je optimální doporučená kombinace programů následující: 5 minut **[EMS]** + 10 minut **[RF]** + 10 minut **[HIFU]** (můžete ve stejném pořadí).
- Při preferenci aktivní stimulace liftingu pleti v oblasti obličeje je optimální doporučená kombinace programů následující: 5 minut **[EMS]** + 20 minut **[RF]** (můžete ve stejném pořadí).
- Přístroj je možné použít maximálně 3x za týden (to platí na stejné i různé partie těla).
- Optimální frekvence použití je tedy např. pondělí, středa, sobota.
- Tento týdenní program zopakujte v rámci jednoho měsíce.
- Při používání přístroje v průběhu tří týdnů doporučujeme čtvrtý týden celý vynechat.
- Poté opět pokračujte v používání přístroje v rámci tří týdenního cyklu.

DÉLKA & FREKVENCE POUŽITÍ - OBLIČEJ

Délku použití na oblast obličeje jsme krátce uvedli v předchozím odstavci. Délku ošetření však pleti nelze stanovit s přesností na vteřiny podle předem definovaných tabulek. Délka stimulace pleti pomocí radiofrekvenčních vln výrazně závisí na více faktorech - stavu pleti, věku uživatele, typu pleti, citlivosti pleti nebo způsobu, jakým se uživatel dlouhodobě o pleť stará. V obecné rovně platí, že by při naprosto prvním použití mělo ošetření trvat řádově v jednotkách minut. Při úvodním použití lze postupně analyzovat, jakým způsobem pleť reaguje na technologii radiofrekvenčních vln nebo za jak dlouhou dobu přestane být po ošetření citlivá na dotyk. Tím lze stanovit časový rozestup mezi jednotlivými procedurami. Délka ošetření by měla také zohlednit rozsah plochy vybrané partie. Celé plocha obličeje zabere delší čas vzhledem k členitějšímu reliéfu povrchu.



TEST PLETI

Každý jsme originál. Existuje celá řada typů pleti. Přestože je používání přístroje naprosto bezpečné, je doporučeno provést test pleti, zda použití nevyvolá případné nežádoucí podráždění pleti či alergickou reakci.

1. Naneste na pleť dostatečnou vrstvu sonogelu (např. na část stehna nebo lýtky).
2. Ošetřete malou část pleti postupně střídáním programů **[EMS]** **[RF]** a **[HIFU]** v celkové délce 15 minut dohromady.
3. Pokud se v průběhu 24 hodin na pleti neobjeví jakékoliv nestandardní zbarvení vlivem alergické reakce, přístroj můžete bez obav používat dle instrukcí v tomto návodu k obsluze.



DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

- BeautyRelax Celluform Ultimate je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní provoz je základní předpoklad pro používání přístroje uživatelem v domácím prostředí. Používání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky. Vždy je však nezbytně nutné postupovat v souladu s pokyny uvedené v návodu k obsluze. Jen tak bude používání přístroje maximálně bezpečné a efektivní.
- Ošetření by mělo být vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Radiofrekvenční vlny, ultrazvukové vlny a EMS pulzy získají lepší schopnost navázat se na pleť.
- **Při ošetření pleti v režimu působení radiofrekvenčních vln vždy začínejte na hodnotě intenzity 1. Zvyšujte pomalu se zvýšenou opatrností. Při vyšších hodnotách intenzity dosahuje přístroj velmi silného výkonu radiofrekvenčních vln. Věnujte prosím tomuto faktu zvýšenou pozornost a neberte používání přístroje na lehkou váhu. Pokud cítíte teplo příliš silně, snižte výkon, zrychlete pohyb přístroje po pleti nebo zkrátte samotnou délku kontaktu aplikační hlavice s pletí.**
- **Pokud budete aplikační hlavici držet na pleti na stále stejném místě příliš a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření (radiofrekvence), přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností. Pokud by nebyl přístroj dostatečně výkonný, nebylo by možné dosáhnout požadovaných výsledků.**
- **Aplikační hlavici se po pleti můžete pohybovat různými způsoby. Krátkými táhlými pohyby nebo krouživými pohyby. Pokud budete držet hlavici příliš dlouho v kontaktu s pletí (radiofrekvence), nakumuluje se takové množství energie, které zvýší teplotu aplikátoru. Zvýšení teploty aplikátoru není závadou přístroje, ale průvodní jev působení radiofrekvenčních vln po delší dobu.**
- Pokud je to jenom možné, snažte se aplikační hlavici vyhnout oblastem s velmi tenkou a citlivou pokožkou. Pokud je menší vrstva podkožního tuku, pracujte s nižšími hodnotami výkonu nebo se této části pleti vyhněte úplně.
- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte kontaktní plochy aplikační hlavice. Ideální je použití čistého lihu pro dezinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost kontaktní plochy aplikační hlavice.
- Při používání červeného světla není třeba ochranných pomůcek zraku. Přesto je striktně doporučeno nedívat se při používání přímo do zdroje světla po delší dobu. Letmý pohled určitě riziko nepředstavuje.




MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA

UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE



PODBRADEK

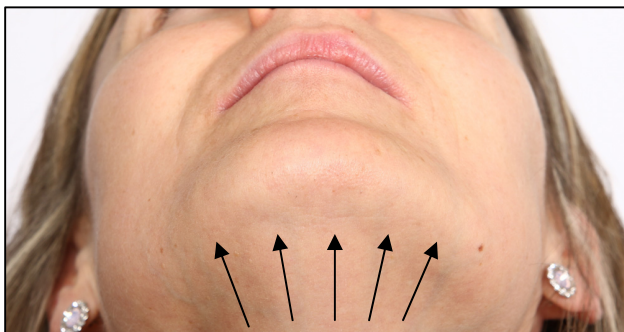

Aplikační hlavici se pohybujte v krátkých táhlých nebo krouživých pohybech. Aplikátorem můžete také stát na jednom místě a posunovat se postupně. Snažte se vyhnout pokud možno oblasti štítné žlázy. Přístroj přiložte na šířku, aby pokryl co největší plochu brady.

PAŽE




Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na ruce. Aplikační hlavici přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně ošetřete vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujete se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.



Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem ošetřete postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.



Aplikační hlavici se pohybujte v krouživém pohybu. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

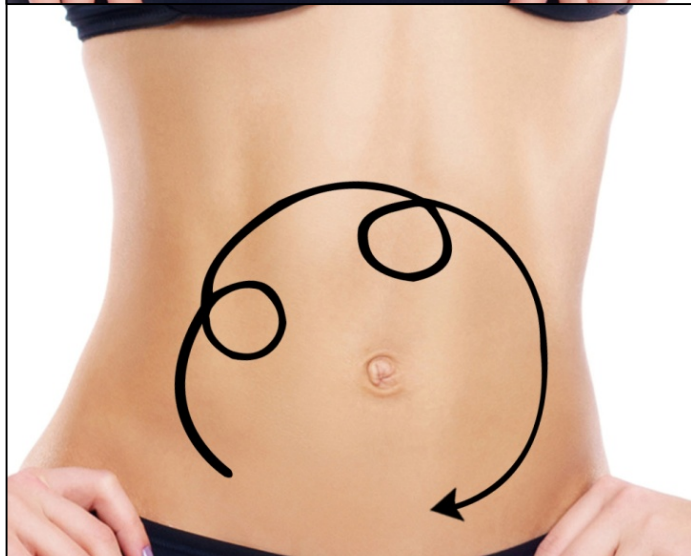

Aplikační hlavici se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.



Aplikační hlavici se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.

HÝŽDĚ



Aplikační hlavici se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.



Aplikační hlavici se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.



Aplikační hlavici se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto ošetřit celou oblast hýždí.

STEHNA & LÝTKA

Aplikační hlavici se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavici se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavici se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete ošetřit přední i zadní část končetiny.

DOPORUČENÁ TECHNIKA POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Při použití aplikační hlavice na vybrané části těla je možné použít více technik masáže. V tomto směru si můžete pohyby přizpůsobit podle sebe. V případě ošetření druhé osoby aktivní komunikací sledujte míru, jakou vnímá projev tepla působením radiofrekvence. Zde jsou doporučené dvě možnosti práce s aplikační hlavicí:

plynulý pohyb

Aplikační hlavici se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí sonogelu. **Nikdy nepoužívejte stimulaci pleti aplikační hlavicí „na sucho“.** Při stimulaci pleti plynulým pohybem je celkově zkrácen čas kontaktu aplikačních kolíčků s konkrétním místem. **Při konstantním nastavení úrovně intenzity radiofrekvence můžete při rychlejším pohybu vnímat menší míru působení radiofrekvence ve srovnání s pomalejším pohybem.**

razítkování

Při ošetření vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti v časovém rozsahu řádu vteřin (tzv. razítkování). Intenzitu přidávejte vždy podle pocitu. Hlavici přesuňte o kousek vedle v momentu těsně před tím, než pocítíte nejvyšší maximum tepla. Ošetření pleti by nikdy nemělo být nesnesitelně bolestivé, ale příjemné. Akceptovatelné je pouze pocit vnímání tepla na snesitelné úrovni. Pokud budete aplikační hlavici držet na pleti příliš dlouho a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření, přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností.





Poznámka:

Stejný princip použití techniky masáže můžete aplikovat také na oblast obličeje a brady.

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

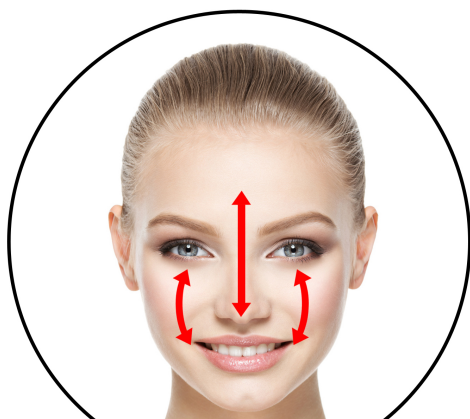

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Použití přístroje je vždy spojeno s aplikací sonogelu. Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Pokud přístroj používá více osob, je třeba provést dezinfekci povrchu aplikační hlavice. Ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost.


NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Přístroj se nabíjí pomocí stojánku, který je součástí balení. Baterii nabíjte vždy, pokud již přístroj není možné zapnout. Pro zahájení procesu nabíjení stačí přístroj položit na stojánek. Nabíjení začne automaticky.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně příslušenství, které je součástí balení.
2. Nabíjecí stojánek a 220V adaptér propojte pomocí USB kabelu.
3. Proces nabíjení začne automaticky, jakmile položíte přístroj do stojánku.
4. Na stojánku jsou dva kontaktní piny, které musí zapadnout do pinů na spodní straně přístroje.
5. Průběh nabíjení signalizuje blikající tečka na displeji.
6. Jakmile se rozsvítí všechny tři tečky ve svislé poloze, proces nabíjení je dokončen.
7. Délka nabíjení závisí na stavu baterie. Může trvat až dvě hodiny.

PLNĚ NABITÁ BATERIE

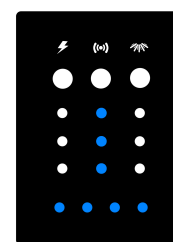

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj není možné zapnout	Baterie má nedostatečné množství energie	Nabíjte baterii přístroje pomocí nabíjecího stojánku
Přístroj se po několika minutách automaticky vypne	Aktivoval se časovač	Časovač je nastaven na 5 minut. Pro další používání je třeba přístroj znovu zapnout
Necítím působení EMS pulzů	Pokožka je příliš suchá	Naneste na pleť větší množství kontaktního gelu
	Aplikační hlavici se pohybujete příliš rychle	Provádějte pomalejší pohyby po pleti
	Aplikační kuličky nejsou v plném kontaktu s pletí	Kontaktní plochy kuliček aplikační hlavice by měly být v co nejlepším kontaktu s pletí
Radiofrekvence příliš pálí	Zůstáváte s přístrojem na jednom místě příliš dlouho	Upravte pohyb aplikační hlavice po pleti nebo zkratíte dobu kontaktu s pletí
	Vysoká intenzita	Snižte intenzitu funkce RF o stupeň níže nebo na stupeň 1
	Pokožka je příliš suchá	Naneste na pleť větší množství kontaktního gelu
Působení HIFU ultrazvuku je příliš intenzivní	Je nastavena příliš vysoká úroveň programu HIFU	Snižte intenzitu funkce HIFU o stupeň níže nebo na stupeň 1

SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE

Při neinvazivním přístrojovém ošetření tukové tkáně je doporučeno v ideálním případě podpořit činnost lymfatického systému těla. Stejným způsobem nabízí podobný typ ošetření i profesionální masážní studia. Lymfatická masáž a podpora krevního oběhu významným způsobem napomáhá k odvodnění končetin a odplavení veškerých nežádoucích škodlivin z krevního řečiště. V rámci naší nabídky vám můžeme pro inspiraci doporučit následující produkty, které můžete s modelem BeautyRelax Celluform Ultimate efektivně kombinovat:



Masážní přístroj BeautyRelax
Vacuform Premium



Masážní přístroj BeautyRelax
Vacuform



Masážní přístroj na vakuovou drenáž
BeautyRelax Vacuform Exclusive



Masážní přístroj BeautyRelax
Lymfopress Premium

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro ošetření jednotlivými technologiemi přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.



Jsem silně obézní. Mám vysokou nadváhu. Je pro mě použití přístroje BeautyRelax Celluform Ultimate spásné/správné řešení?

Bohužel nikoliv. V tomto případě vám za výše uvedených okolností přístroj používat nedoporučujeme. Estetickým přístrojem není možné kompenzovat nezdravý životní styl, při kterém s opakující se pravidelností konzumujete z dlouhodobého hlediska více kalorií, než je tělo schopné metabolizovat. Pokud trpíte vysokou nadváhou, doporučujeme se obrátit na svého praktického lékaře nebo výživového poradce a řešit proces hubnutí pod odborným dohledem.

Pro koho je tedy přístroj BeautyRelax Celluform Ultimate vhodný?

Estetický přístroj je vhodný pro každého, kdo je vnitřně přesvědčený, že skutečně má vážný zájem zapracovat na svém vzhledu. I přes veškerou snahu se nedaří redukovat na vybraných částech těla nežádoucí vrstvu tukové tkáně. Přesto je ochoten vyzkoušet neinvazivní cestu a vyhnout se chirurgickému zákroku pomocí skalpelu. Přístroj je určen pro každého, kdo již pociťuje v oblasti obličeje jistou únavu. Pokožka ztratila svoji původní pružnost. Výskyt vrásek je zvýšený.

Je třeba v průběhu používání přístroje nějakým způsobem upravit jídelníček?

Rozhodně ano. Pokud je to jenom možné, vyhněte se v den použití přístroje konzumaci skutečně těžkých mastných jídel. Máme na mysli zejména pokrmy, které byly připraveny technikou smažení na oleji. Rovněž doporučujeme vyhnout se slazeným nápojům. V ideálním případě konzumovat pouze čistou vodu nebo vodu ochucenou o šťávu z čerstvého ovoce. Odlehčením jídelníčku výrazně pomůžete svému organismu v období používání přístroje.

Je třeba v průběhu používání přístroje nějakým způsobem upravit pohyb?

Použití přístroj nemusíte rozhodně kombinovat s vysokými sportovními výkony. Přesto je vhodné - ideálně v den použití přístroje - věnovat krátký čas lehké procházce, běhu nebo jízdě na rotopedu či kole. Pokud nemáte možnost opustit domov, alespoň se lehce protáhněte. Použijte cviky, abyste se mírně zadýchali. Znovu zdůrazňujeme. Není třeba podávat extrémní fyzické výkony. Hlavním smyslem je podpořit váš lymfatický systém a rychlost metabolismu, aby byla uvolněná energie při stimulaci tukové tkáně efektivně využita. Optimální je načasování po použití přístroje.

Je ošetření technologiemi přístroje BeautyRelax Celluform Ultimate bolestivé?

Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné. Při použití programu technologie EMS pulzů můžete cítit na pokožce pocity připomínající mravenčení až lehké brnění. Průvodním jevem působení radiofrekvence je pocit tepla. Průvodním jevem působení ultrazvukových vln HIFU je gradace tepla až mírné „píchnutí“.

Jakých výsledků v otázce stimulace tukové tkáně je možné dosáhnout?

Výsledek je výrazně ovlivněn několika faktory. Uvolněný tuk musí tělo zpracovat. To, jak rychle jej zpracuje, závisí především na rychlosti metabolismu, typu vašeho tuku (zda je prorostlý až do svalové tkáně), stavu lymfatického systému nebo životosprávy. Estetický přístroj vnímejte jako užitečný nástroj, který vám napomůže ve vašem úsilí vypadat lépe. Pro dosažení vysněných cílů je třeba upravit životosprávu a zvýšit pohyb (mluvíme stále o lehké pohybové aktivitě, žádná extrémní fyzická zátěž, na kterou nejste případně zvyklí). Je to důležité, aby procesy, které estetický přístroj ve vašem těle nastartuje, mohly úspěšně a efektivně proběhnout.

Proč je kladen důraz na péči o kontaktní plochy aplikační hlavice po každém použití?

Kontaktní plochy je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu a pečlivě dezinfikovat po každém jednotlivém použití. Jednou za čas je ideální pomocí spreje na bázi alkoholu. Zabráníte tak možnosti šíření bakterií a zajistíte maximální hygienu provozu. Při používání přístroje více osobami je nezbytné dezinfekci pomocí spreje provádět po každém použití. Aplikační hlavici nezapomeňte důkladně vysušit pomocí hadříku. Násobně tím prodloužíte životnost kontaktních ploch.

Může přístroj používat více osob?

Ano. Je to možné, ale za dodržení určitých podmínek. Věnujte zvýšenou pozornost zejména dezinfekci aplikační hlavice. Zabráníte přenosu bakterií či případně kožních chorob. Pro dezinfekci použijte ideálně alkoholový roztok ve spreji. Povrch aplikační hlavice vždy důkladně osušte.

V jakém stavu by se měla pleť nacházet těsně před použitím radiofrekvence?

Pokožka by měla být co nejvíce čistá. Zbavena všech povrchových nečistot. Ideální je načasování po koupeli. Zde bychom rádi zdůraznili, že není vhodné pleť příliš nahřát horkou vodou.

Jaké přípravky je vhodné použít po ošetření přístroje?

Pleť je vhodné po použití přístroje dostatečně hydratovat. Doporučujeme použít běžný hydratační krém. Pleť potřebuje dostatečný přísun vláhy pro její regeneraci. Minimálně v den přístrojového ošetření je vhodné se vyhnout kosmetickým procedurám, jako např. hloubkové čištění pleti diamantovou mikrodermabrazí nebo zahřátí pleti horkou párou. Po ošetření radiofrekvencí je pleť mírně podrážděna a může zčervenat. Pleť potřebuje po stimulaci radiofrekvencí určitý čas pro následnou regeneraci.

Jaké výsledky mohou očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleť projeví?

Účinek radiofrekvence je velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. V případě zarudnutí pleti po ošetření se jedná o běžný průvodní jev. Pokožka je po skončení ošetření na povrchu teplejší. V následujících dnech dochází postupně k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za kvalitu pružnosti pleti. Neinvazivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces s definitivním efektem. Pleť je třeba pravidelně stimulovat dle doporučené délky a frekvence použití.

Jakým způsobem je možné působení radiofrekvence vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pleť proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis a k tukové tkáni radiofrekvenční vlny. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přesné zacílení do vrstvy dermis a tukové tkáně o specifické frekvenci a výkonu.

Může aplikační hlavice povrch pleti poranit?

Při nesprávném použití přístroje může. Rozsah nastavení výkonu je záměrně upraven tak, aby byl schopen ošetřit celé spektrum uživatelů s různou citlivostí pleti a různou vrstvou tukové tkáně. Můžeme tedy považovat výkon přístroje za mírně „předimenzovaný“. Jedna z hlavních výhod přístroje je flexibilita použití se zaměřením a vybrané partie těla. Úprava dávkování výkonu umožňuje ošetření i velmi citlivých partií. Vyšší výkon nakopat pro větší plochy, kde je míra citlivosti na nižší úrovni. Estetický přístroj musí být schopen nabídnout dostatečný potenciál výkonu. V opačném případě by nebylo možné provést ošetření s vysokou efektivitou. Při dávkování výkonu je třeba vždy postupovat s maximální opatrností.

Proč nabízí přístroj více technologií? Existuje s ohledem na očekávané výsledky nějaký vzájemný vztah jednotlivých technologií, které pracují v jednotlivých módech?

Estetika těla, to není pouze snaha o cílenou redukci tukové tkáně. Lidské tělo může doprovázet celá řada nežádoucích jevů v podobě výskytu celulitidy, povislé pokožky se sníženou pružností, ochablé svaly. Každá technologie má svůj specifický význam. Technologie se vzájemně nevylučují. Při použití přístroje je možné programy vzájemně střídat. Velice zjednodušenou formou. Radiofrekvence působí ve dvou rovinách. Podpora tvorby vlastního kolagenu a stimulace tukových buněk. EMS pulzy aktivně posilují ochablou strukturu svalů. HIFU ultrazvukové vlny se snaží velmi zjednodušeně narušit povrch tukových buněk a uvolnit tak energii, kterou tukové buňky uchovávají. Červené světlo je z oblasti fotonové terapie jedno z nejpoužívanějších. Napomáhá potlačit tvorbu pigmentu.

Je důležitý směr pohybu přístroje po pleti?

Určitě není. Nezáleží na tom, jestli budete na pleti „vytvářet“ kolečka nebo čárky. Na pleti můžete zůstat stát a dále se posunout o kousek vedle. Metoda tzv. razítkování. Klíčové je sledovat rychlost pohybu aplikační hlavice po pleti a podle vnímání působení technologií upravit intenzitu. Ošetření by vám mělo být příjemné. Nebolestivé. Pokud je intenzita vyšší, zkuste zrychlit pohyb hlavice po pleti.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních přístrojů. Přístroj neléčí obezitu nebo jakékoliv jiné onemocnění. Přístroj nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají v redukci podkožního tuku, potlačení projevů celulitidy a zvýšení pružnosti pleti.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. Aby pro vás bylo používání přístroje maximálně bezpečné, dbejte pečlivě všech pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Je přístroj vodotěsný?

Ano. Přístroj má certifikaci ochrany proti vodě dle standardu IPX7.

PÁR VĚT ZÁVĚREM

Přístroj BeautyRelax Celluform Ultimate - jak se lidově říká - klame tělem. A pro tento konkrétní model to platí dvojnásob. Na první, druhý i třetí pohled se vám bude zdát malý a velmi lehký. Konzervativní zákazníci by tento fakt mohl překvapit. „Přece aby jakýkoliv přístroj kvalitně pracoval, musí být velký a těžký“. V oblasti estetiky to rozhodně neplatilo a neplatí. Opak je pravdou. Při vývoji nových modelů je kladen velký důraz na vysoký komfort uživatele. Přístroj musí mít ergonomický tvar, aby se snadno držel. Musí být velmi lehký, aby se bylo možné plně soustředit na průběh použití přístroje. Například ošetření obličeje vyžaduje větší míru pečlivosti a soustředění. Pracovat s lehkým přístrojem je v tomto případě obrovský benefit. Rozměry přístroje jsou ovlivněny především univerzálností použití. Designové provedení přístroje představuje určitý kompromis pro ošetření velké plochy na vybraných částech těla, ale zároveň velmi malé plochy v oblasti obličeje. Celluform Ultimate patří rozhodně ve své kategorii mezi to nejlepší, co vám estetické přístroje pro koncové zákazníky mohou nabídnout. Jak bylo již v návodu k obsluze uvedeno. Přístroj dosahuje opravdu solidního výkonu. Aby byl schopen vyhovět velkému počtu různých uživatelů a splnil deklarované vlastnosti, vyšší výkonostní rozsah je nezbytný. Není třeba mít z používání strach, ale určitý respekt k výkonosti přístroje je rozhodně na místě.



Martin Hrbek

www.beautyrelax.cz

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Masážní přístroj na formování postavy

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax Celluform Ultimate BR-2720**

EAN 8594166119604

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno
Datum vydání: 1.3.2022

.....
Martin Hrbek, jednatel