

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-2822 THERMAGE
FRAXLIFT TRIPPLE ATTACK



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
UPOZORNĚNÍ	5
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	6
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	7
DOPORUČENÉ PARTIE PRO APLIKACI	8
ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE	8
POUŽITÍ SONOGELU	8
HLAVNÍ VÝHODY	9
VLASTNOSTI PŘÍSTROJE	9
OBSAH BALENÍ	9
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	10
METODY REDUKCE VRÁSEK	10
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	11
RADIOFREKVENCE	11
POPIS PŘÍSTROJE	12
POPIS TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU	13
POPIS APLIKÁTORU	13
POPIS DISPLEJE	14
POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ	15
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC	17
INSTALACE PŘÍSTROJE	18
INSTALACE APLIKAČNÍ HLAVICE	18
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	19
DOPORUČENÁ METODA POHYBU PO PLETI	20
METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU	21
MAPA CITLIVOSTI PLETI	24
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	25
DOPORUČENÝ PLÁN APLIKACE	27
ROČNÍ PLÁN APLIKACE (12 MĚSÍCŮ)	28
ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU	30
ŽIVOTNOST APLIKAČNÍCH HLAVIC	31
PÁR VĚT ZÁVĚREM	32
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	32
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	33
CERTIFIKACE	33
EU DISTRIBUTOR	33
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	34

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – Špičková technologie krásy pro domácí i profesionální použití

Vítejte ve světě profesionální estetiky v pohodlí domova! BeautyRelax je ryze česká značka, která od roku 2010 přináší inovativní přístroje pro péči o pleť, tělo a vlasy. Naše zařízení kombinují nejmodernější technologie s jednoduchým ovládáním, takže si můžete dopřát salonní péči bez nutnosti návštěvy kosmetického studia.



Proč si vybrat BeautyRelax?

Vysoká účinnost – Používáme stejné technologie jako profesionální salony (radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud).

Univerzální použití – Vhodné pro domácí i komerční využití.

Odborné poradenství – Pomůžeme vám vybrat ideální přístroj na míru vašim potřebám.

Nadstandardní služby – Rychlé doručení, záruční a pozáruční servis.

Naše kategorie přístrojů

Kosmetické přístroje – Pro dokonalou pleť bez vrásek, akné nebo pigmentace.

Přístroje na formování postavy – Redukce celulitidy, lifting a modelace kontur.

Masážní technologie – Lymfatické masáže, relaxace a regenerace svalů.

IPL depilace – Trvalé odstranění chloupků šetrnou cestou.

Špičková péče moderními technologiemi

Díky pokrokům v estetických technologiích si nyní můžete dopřát účinná aplikace bez bolestivých zákroků a dlouhého čekání. Ať už řešíte:

- Vrásky, povadlou pleť nebo nedostatek elasticity
- Celulitidu, ochablé kontury nebo otoky
- Nechtěné chloupky nebo problematickou pokožku

S BeautyRelax dosáhnete viditelných výsledků šetrně, bezpečně a bez nepříjemných pocitů.

Vize zakladatele

„Od začátku naší cesty je naší prioritou zpřístupnit špičkové estetické technologie každému. Ať už hledáte přístroj pro osobní péči, nebo profesionální studio, nabízíme řešení s vysokou užitnou hodnotou, dlouhou životností a rychlou návratností investice.“

Martin Hrbek, zakladatel a odborný konzultant BeautyRelax

Ušetřete čas i peníze

Pravidelným používáním přístrojů BeautyRelax můžete výrazně snížit náklady na kosmetické procedury a zároveň mít svou péči plně pod kontrolou.

- Výsledky bez bolesti a zbytečného stresu
- Šetrná neinvazivní řešení pro všechny typy pleti
- Vybírejte z desítek modelů pro různé potřeby

Objevte kouzlo moderní estetiky a vyberte si svůj ideální přístroj v naší kompletní nabídce. Těšíme se, že s námi budete sdílet vášně pro krásu a inovace!



(+420) 737 196 160
mh@santadria.cz
shop.beautyrelax.cz
www.beautyrelax.cz
facebook.com/BeautyRelaxEquipment

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

MARTIN HRBEK odborný konzultant a školitel
SANTADRIA s.r.o. Mojžírovo nám. 75/2 Brno 62100 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze, seznamte se se všemi vyobrazeními a dokumentaci si uschovejte pro případné pozdější použití. Instalaci a uvedení přístroje do provozu provádějte výhradně podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Pokud je vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Nejste-li si jisti, zda je váš zdravotní stav slučitelný s používáním přístroje, doporučujeme vhodnost použití konzultovat se svým praktickým lékařem nebo dermatologem.
- Používá-li přístroj více osob, je nutné dbát zvýšené pozornosti na dodržování hygienických zásad. Po každém použití důkladně dezinfikujte kontaktní části aplikační hlavičky dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu.
- Pokud je přístroj poškozen, nefunguje správně nebo došlo k jeho pádu do vody, **nikdy jej neuvádějte do provozu.**
- V případě mechanického poškození se nedotýkejte vnitřních částí přístroje, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj spadne na zem, může dojít k jeho vnitřnímu poškození. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na servisní oddělení nebo autorizovaného prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny, sprchy, bazény apod.
- Přístroj **není omyvatelný**. Žádná jeho část nesmí být ponořena do vody ani čištěna pod proudem tekoucí vody.
- Nikdy nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Po každém použití jej vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí, vyčkejte před jeho zapnutím alespoň **3 hodiny**, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje.
- Přístroj není určen pro používání dětmi ani osobami, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti neumožňují jeho bezpečné používání bez dozoru.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna, otevřený oheň apod.
- Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat, upravovat nebo opravovat. Veškeré servisní zásahy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Přístroj skladujte v suchém a čistém prostředí. Chraňte jej před prachem a nečistotami.
- Během provozu přístroj nijak nezakrývejte, zejména nezakrývejte ventilační otvory a mřížku ventilátoru, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám.
- Distributor nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze ani za následky způsobené nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za škody na zdraví nebo majetku vzniklé v důsledku jiného než určeného způsobu používání přístroje nenese distributor odpovědnost.

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax BR-2822 THERMAGE FRAXLIFT TRIPPLE ATTACK je přístroj, který je určen pro kvalitní kosmetické přístrojové použití. **Přístroj není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění.** Přístroj neposkytuje prostřednictvím aplikační hlavice technologii, která by narušila integritu pleti. Nevyužívá žádné jehly. Žádná část z aplikačních hlavic nikdy nepronikne skrz povrch pleti. Přístroj byl vyvinut tak, aby zlepšil z dlouhodobého měřítka kondici pleti. Pomocí technologie radiofrekvenčních vln prohřívá pleť pro podporu tvorby vlastního kolagenu a elastických vláken.

Rozsah licence pro využívání radiofrekvence za účelem komerčního používání je dána zákonem v každé zemi Evropské unie. Ten stanoví, jaká je třeba úroveň erudice pro uvedenou technologii, který přístroj nabízí. Respektive dosaženou úroveň vzdělání/licence pro přístroj obdobného typu.



Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za používání přístroje za podmínek, které jsou v rozporu s legislativou v dané zemi používání. Provozovatel může veřejně pro komerční použití pracovat s přístrojem pouze tehdy, pokud disponuje oprávněním dle aktuálně platného znění zákona/vyhlášky. Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody, které vznikly v rozporu s používáním podmínek stanovených v tomto návodu k obsluze.

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT



Použití přístroje **BeautyRelax** není vhodné nebo je **zakázáno** v následujících případech:

Zdravotní omezení

- Těhotenství a období kojení
- Kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické přístroje
- Kovové implantáty v oblasti obličeje, krku nebo dekoltu (šrouby, destičky, výplně, zubní implantáty v blízkosti aplikované oblasti)
- Epilepsie
- Onkologické onemocnění (aktivní nebo v léčbě)
- Závažná onemocnění srdce a cév
- Poruchy krevní srážlivosti
- Autoimunitní onemocnění v aktivní fázi
- Horečnaté a infekční stavy
- Neurologická onemocnění spojená se sníženou citlivostí pokožky

Kožní omezení

- Otevřené rány, čerstvé jizvy, popáleniny
- Akutní záněty kůže, ekzém, lupénka v aktivní fázi
- Silné akné, hnisavé nebo zanícené projevy
- Infekční kožní onemocnění (bakteriální, virové, plísňové)
- Aktivní opar (herpes)
- Silné podráždění, alergická reakce nebo spálená pokožka
- Po čerstvých estetických zákrocích
(botox, výplně, chemický peeling, laser, mezoterapie – minimálně 2–4 týdny dle typu zákroku)

Další omezení použití

- Nepoužívat na očích, na očních víčkách, štítné žlázy a genitálií
- Nepoužívat při snížené schopnosti vnímat teplo nebo bolest
- Nepoužívat na poraněnou pokožku
- Nepoužívat pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

Důležité upozornění

V případě jakýchkoliv pochybností, chronického onemocnění nebo dlouhodobé léčby doporučujeme konzultaci s lékařem před použitím přístroje. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické použití a nenahrazuje lékařskou péči.

DOPORUČENÉ PARTIE PRO APLIKACI

- Obličej
- Krk
- Dekolt

ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE

- Oblast spánků
- Rty
- Oční víčka



POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Radiofrekvenční vlny se tak mohou na pleť lépe navázat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.



HLAVNÍ VÝHODY

- Redukce jemných mimických vrásek
- Zvýšení pružnosti kontur obličeje
- Zpevnění a vypnutí pleti
- Remodelace kolagenních vláken
- Zcela neinvazivní charakter aplikace
- Bezpečné, bezbolestné používání
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

- Přímé zacílení na remodelaci kolagenových a elastických vláken
- Určeno pro všechny typy pleti bez omezení
- Neinvazivní aplikace (žádná část aplikátoru nepronikne mechanicky skrz pokožku)
- Samotná aplikace zabere pouhých několik minut
- Skutečně účinné řešení pro zralou a unavenou pleť
- Přístrojová aplikace na pleti bez zátěže organismu s maximální bezpečností použití
- Určeno pro obličej, krk a dekolt
- Praktické stolní provedení se síťovým napájením
- Aplikace přístroje bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů (na pleti je cítit pouze příjemné teplo)
- Vysoká užitná hodnota přístroje s dlouhou životností aplikátorů
- Optimalizovaný výkon pro maximální účinek při zachování šetrnosti k pleti
- Vysoká účinnost aplikace i velmi zralé pleti s výraznými hlubokými vrásky
- Podpora tvorby vlastního kolagenu a okamžitá remodelace elastických vláken
- Zjemnění jizviček a nerovností pleti např. po akné
- Zvýraznění charakteristických kontur obličeje
- Pleť působí nesrovnatelně svěžím a mladistvým vzhledem
- Neinvazivní použití (žádná část aplikátoru neproniká mechanicky přes povrch pleti)
- Stálá kontrola kvality kontaktu povrchu aplikační hlavičky s pletí (ideální v případě, kdy jedna osoba používá přístroj na druhé osobě)
- Certifikovaný přístroj
- Frekvence radiofrekvence: **1Mhz**
- Rozsah dávkování energie: **20 úrovní**
- Teplota: max. **40°C**

OBSAH BALENÍ

- 1x Hlavní jednotka BeautyRelax BR-2822
- 1x Aplikační hlavičky s vyměnitelnou hlavicí
- 1x Hlavička 1: 4 kontaktní piny
- 1x Hlavička 2: 36 kontaktních pinů
- 1x Hlavička 3: 64 kontaktních pinů
- 1x Napájecí kabel 220V
- 1x Prodlužovací kabel 220V
- 1x Sonogel
- 1x Návod k obsluze

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je použití kosmetického přístroje pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti kosmetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

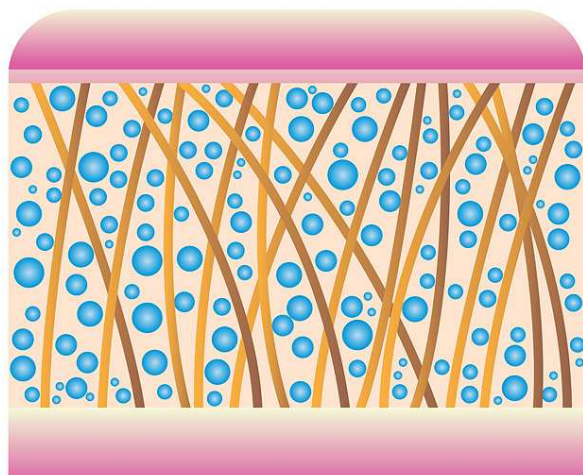

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

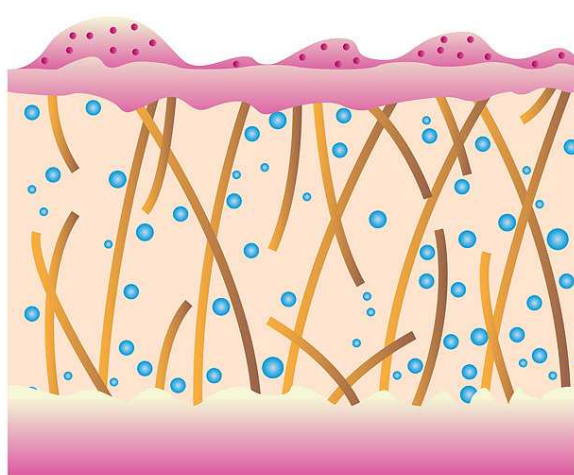

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Fraxlift Thermage Tripple Attack je profesionální kosmetický přístroj pro neinvazivní lifting pleti. Pokročilá technologie dávkované energie multipolární radiofrekvence je přenášena do pleti prostřednictvím třech vyměnitelných aplikátorů. Různé rozměry aplikačních hlavice umožňují velmi precizní použití na všech záhybech obličeje, krku a dekoltu. Efektivně vyhladí i výrazné hluboké vrásky. Nekompromisní liftingový efekt. Možnost plynulého dávkování výkonu. Přizpůsobí se každému uživateli s různou tloušťkou podkožní tukové tkáně. Stálá kontrola kvality kontaktu povrchu aplikační hlavice s pletí. Stolní provedení.



RADIOFREKVENCE

Stručný princip fungování technologie

Aplikační hlavice generuje energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Technologie multipolární radiofrekvence je také někdy označeno zkráceně jako **THERMAGE**.



POPIS PŘÍSTROJE

1. Hlavní jednotka přístroje
2. Displej
3. Hlavice 64 kontaktních pinů
4. Hlavice 4 kontaktní piny
5. Hlavice 36 kontaktních pinů
6. Aplikační hlavice
7. Konektor pro aplikační hlavici
8. Konektor pro napájecí kabel



POPIS TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko snížení intenzity působení radiofrekvence
2. Tlačítko zvýšení působení radiofrekvence
3. Tlačítko **START/STOP**
4. Tlačítko délky působení radiofrekvenčních vln v sekundách (program PULS)
5. Tlačítko délky působení radiofrekvenčních vln v sekundách (program PULS)
6. Tlačítko **MODE**




POPIS APLIKÁTORU

1. Tlačítko **SPOUŠŤ** (aktivace působení radiofrekvence)
2. Tlačítko pro uvolnění hlavice
3. Vyměnitelná hlavice



POPIS DISPLEJE

1. Intenzita působení radiofrekvence - rozsah od 1 do 20
2. Délka působení radiofrekvenčních vln v sekundách (program **PULS**)
3. Program **CTN** - kontinuální působení radiofrekvenčních vln
4. Program **PULS** - pulzní působení radiofrekvenčních vln
5. Čas aplikace
6. Kontrola optimálního kontaktu hlavice s pletí
7. Číslo připojené hlavice
8. Signalizace působení radiofrekvenčních vln
9. Signalizace stisknutí tlačítka spouště na aplikační hlavici
10. Ukazatel působení radiofrekvenčních vln v časovém úseku (program **PULS**)
11. Ukazatel START/STOP

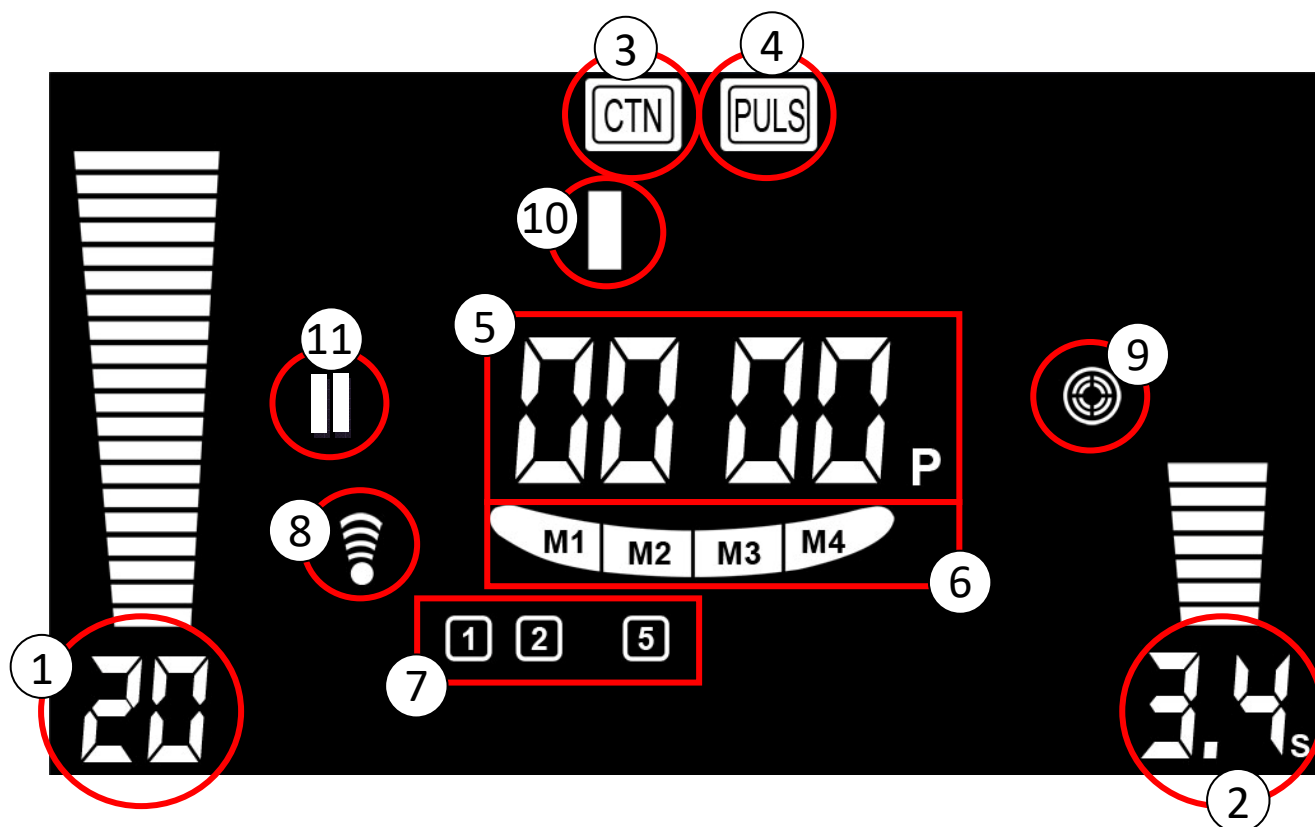

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

Pomocí tlačítek na ovládacím panelu si můžete nastavit celou řadu funkcí. Základní technologie působení multipolární radiofrekvence je stále stejná. Přesto si můžete nastavit celou řadu parametrů, abyste byli schopni aplikovat přístroj na pleti s maximální efektivitou. Všechny nastavené funkce jsou zobrazeny na displeji. Zde vám podrobně popíšeme, jaký je význam jednotlivých symbolů na displeji.

1. Intenzita působení radiofrekvence - rozsah od 1 do 20

Možnost nastavení výkonu radiofrekvence v rozsahu od 1 (nejnižší) do 20 (nejvyšší). Výkon si tak můžete snadno dávkovat. Výkon radiofrekvence můžete v průběhu použití přístroje kdykoliv změnit. Dosažená teplota radiofrekvence 40°C.

2. Délka působení radiofrekvenčních vln v sekundách (program PULS)

Program **PULS** umožňuje automatické působení radiofrekvence v přednastavený čas. Čas je uveden v sekundách. Při podržení tlačítka spouště na aplikační hlavici působí radiofrekvence v přesně nastaveném časovém intervalu. Dalším stiskem spouště můžete působení radiofrekvence v nastaveném časovém úseku opakovat.

3. Program CTN - kontinuální působení radiofrekvenčních vln

Program **CTN** je určen pro kontinuální působení radiofrekvence. Můžete si tak sami regulovat, jak dlouho bude působení radiofrekvence probíhat. Radiofrekvenci si dávkujete ručně pomocí spouště na aplikační hlavici. Přístroj pracuje ve dvou základních programech – **CTN** a **PULS**. Mezi programy si můžete přepínat pomocí tlačítka **MODE**.

4. Program PULS - pulzní působení radiofrekvenčních vln

Symbol potvrzuje, že přístroj nyní pracuje v programu **PULS**.

5. Čas aplikace

Čas, po který radiofrekvence působí na pleť. Máte tak stálý přehled, jak dlouho s přístrojem na pleti pracujete. Hodnoty jsou uvedeny ve formátu **MINUTY:SEKUNDY**. Ukazatel času má obrovskou výhodu. Započítává pouze čas, kdy pleť stimulujete radiofrekvencí. Není započten čas, kdy je přístroj v pohotovostním režimu. Máte tak k dispozici velmi přesný údaj, jak dlouho již na pleti s aplikátorem pracujete. Vždy je dobré udržet čas aplikace v rozumných hodnotách.

6. Kontrola optimálního kontaktu hlavičky s pleť

Přístroj je schopen rozpoznat, jak kvalitní je kontakt jednotlivých pinů hlavičky s pleť. To je praktické zejména v případech, kdy přístroj používáte na druhé osobě. Pokud svítí všechny symboly - 1, 2, 3, 4 - hlavička je v plném kontaktu s pleť a aplikace je tak maximálně efektivní.

7. Číslo připojené hlavičky

Přístroj je schopen rozpoznat, jaký typ hlavičky je k přístroji připojen. Každá hlavička má své číslo. Po připojení hlavičky s aplikační hlavičkou se zobrazí na displeji číslo hlavičky.

8. Signalizace působení radiofrekvenčních vln

Symbol zobrazuje rozsah působení radiofrekvenčních vln. Vždy, když jsou čárky u tohoto symbolu aktivní, máte jistotu, že probíhá přenos radiofrekvence do pleti. To je praktické zejména v případech, kdy přístroj používáte na druhé osobě.

9. Signalizace stisknutí tlačítka spouště na aplikační hlavici

Symbol zobrazuje, zda je tlačítko spouště na aplikační hlavici dostatečně stisknuté. Je to vizuální kontrola pro vás, že je tlačítko spouště funkční a správně reaguje na stisk prstu.

10. Ukazatel působení radiofrekvenčních vln v časovém úseku (program PULS)

V programu **PULS** si můžete nastavit časový rozsah působení radiofrekvence. Radiofrekvence působí vždy, když držíte prstem tlačítko spouště na aplikační hlavici. Abyste měli vizuální kontrolu, kdy radiofrekvence reálně působí na pleť, na displeji je pohyblivý ukazatel. Symbol se pohybuje zleva doprava.

11. Ukazatel START/STOP

Symbol zastavení činnosti přístroje. Všechny funkce můžete snadno nastavit v pohotovostním režimu. Pohotovostní režim a režim činnosti přístroje aktivujete pomocí tlačítka **START/STOP**. Pohotovostní režim potvrzuje zobrazení symbolu dvou čárek.

POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC

Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2822 je svými schopnostmi předurčen pro komerční provoz. Velký rozsah nastavení funkcí umožňuje přizpůsobit se individuálním potřebám velkého počtu uživatelů. Důležitý je nejen rozsah nastavení funkcí, ale také variabilita aplikačních hlavice. Součástí balení jsou 3 hlavice, které můžete libovolně měnit. Mají různý rozměr a počet kontaktních pinů. Oblast použití na obličeji, krku a dekoltu. Rozdíl v hlavicích je tedy pouze ve velikosti plochy, kterou jsou schopny povrch pleti pokrýt. Není přesně stanoveno, v jakých případech použít konkrétní typ hlavice. Pravidelným používáním přístroje budete schopni velmi dobře rozpoznat, která hlavice bude v daném případě optimální.



Hlavice
64 kontaktních pinů



Hlavice
4 kontaktní piny



Hlavice
36 kontaktních pinů

INSTALACE PŘÍSTROJE

1. Hlavní jednotku přístroje se vždy snažte umístit na rovnou pevnou plochu. Na spodní straně je umístěna mřížka ventilátoru.
2. Vždy dbejte na to, aby spodní část přístroje nebyla zakryta jakoukoliv bariérou. Především mřížka ventilátoru. Ve spodní straně jednotky je třeba ponechat určitý volný prostor, aby mohl vzduch přirozeně cirkulovat. Pokud byste vytvořili mechanickou bariéru, přístroj by neměl dostatečnou možnost chlazení a došlo by k jeho přehřátí a nenávratnému poškození.
3. Při plánování umístění přístroje berte v potaz dva základní aspekty. Umístění by mělo vycházet z délky nabíjecího kabelu. Napájecí kabel by neměl být příliš napnutý. Přístroj by měl být umístěn tak, aby kabel spojující ruční část přístroje a základnu nebyl při použití přístroje příliš napnutý. Berte v potaz rozsah pohybu ruční části přístroje. Snažte se vyvarovat převrácení základny přístroje případnému spadnutí na zem.
4. Výměnu aplikační hlavice provádějte vždy, jakmile je přístroj vypnutý.
5. K napájení přístroje používejte výhradně kabel, který je součástí balení.
6. Napájecí kabel přístroje používejte přes prodlužovací kabel s tlačítkem **ON/OFF**. Tlačítko slouží jako hlavní tlačítko pro kompletní vypnutí přístroje.

INSTALACE APLIKAČNÍ HLAVICE

- Pro uvolnění hlavice stiskněte červené tlačítko. Hlavice se uvolní (1).
- Zatáhněte za hlavici směrem od aplikátoru (2).
- Tvar hlavice je specificky vykrojen. Hlavici je tedy možné připojit vždy jedním možným způsobem.
- Aplikační hlavice se nešroubuje. Tahem hlavici oddělte. Tlakem připojte k ruční části přístroje. Hlavice by měla být zatlačena nadoraz přesně podle toho, jak je její tvar vykrojen.
- Při výměně aplikační hlavice přistupujte se zvýšenou opatrností. Pozornost zaměřte především na kontaktní tyčinky, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození.
- Výměnu aplikační hlavice provádějte vždy, je-li přístroj vypnutý.



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Na ruční část přístroje instalujte hlavici dle vašeho výběru.
2. Přístroj připojte k napájecímu kabelu přes prodlužovací kabel. Na prodlužovacím kabelu stiskněte tlačítko **ON/OFF**, které se rozsvítí. Tlačítko **ON/OFF** na přístroji se rozsvítí červeně. Zapne se ventilátor.
3. Přístroj zapněte krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Aktivuje se displej. Rozsvítí se panel s dotykovými tlačítky. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.
4. Pomocí tlačítka **MODE** si můžete zvolit program pro aplikaci na pleti. K dispozici jsou na výběr programy **CTN** a **PULS**.
5. Pomocí tlačítek **RF ZVÝŠENÍ** a **RF SNÍŽENÍ** si můžete nastavit intenzitu. K dispozici je celkem 20 úrovní. Aktuálně nastavená intenzita aplikace je na displeji označena v levé části displeje.
6. Pomocí tlačítek **PULSE ZVÝŠENÍ** a **PULSE SNÍŽENÍ** si můžete nastavit délku působení radiofrekvence v sekundách v programu **PULS**.
7. Pro zahájení používání přístroje stiskněte tlačítko **START/STOP**. Nyní můžete pracovat s aplikační hlavici na pleti. Pro aktivaci radiofrekvence použijte tlačítko spouště na aplikační hlavici.
8. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí stisku tlačítka **ON/OFF** na hlavní jednotce přístroje.
9. **V rámci udržení co nejdelší životnosti přístroje doporučujeme po skončení používání aplikační hlavice ponechat přístroj v pohotovostním režimu alespoň v délce 5 minut. Zapnutý ventilátor má tak dostatečný časový prostor přístroj plynule ochladit.**
10. Pro kompletní vypnutí přístroje použijte hlavní tlačítko na prodlužovacím kabelu.

DOPORUČENÁ METODA POHYBU PO PLETI

Při použití aplikační hlavičky na vybrané části pleti je třeba vždy vycházet z optimálního načasování délky kontaktu aplikační hlavičky s pletí a vhodného dávkování výkonu radiofrekvenčních vln. V tomto směru si můžete pohyby přizpůsobit podle sebe. V případě použití přístroje na druhé osobě je doporučena aktivní komunikace. Sledujte míru, jakou vnímá projev tepla 40°C působením radiofrekvence. Zde jsou doporučené dvě možnosti práce s aplikační hlavičkou:

plynulý pohyb

Aplikační hlavičku se pohybujte po pleti delšími i kratšími úseky. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí sonogelu. **Nikdy nepoužívejte stimulaci pleti aplikační hlavičkou „na sucho“.** Při stimulaci pleti plynulým pohybem je celkově zkrácen čas kontaktu aplikačních kolíčků s konkrétním místem.

razítkování

Při aplikaci vždy postupujte tak, že aplikační hlavičku přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu několika sekund (tzv. razítkování).



METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU



METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU

1. Čelo

- Pohybuj hlavicí **od středu čela směrem do stran k vlasové linii**
- Pohyby jsou **vodorovné, plynulé a lehce tažené ven**
- Postupuj po čele **odspodu nahoru**, aby byla pokryta celá plocha

2. Oblast mezi obočím (kořen nosu)

- Ved' hlavicí **od kořene nosu směrem vzhůru ke středu čela**
- Pohyb je **rovný, jemný a tažený nahoru**

3. Nos

- Začni u kořene nosu
- Pohybuj se **směrem dolů po hřbetu nosu**
- Po stranách nosu ved' pohyby **lehce šikmo ven směrem k tvářím**

4. Oční okolí (mimo oční víčka)

- Pohyby ved' **po kostním okraji očnice**, nikdy ne přímo na víčko
- Začni u vnitřního koutku oka
- Pokračuj **obloukovým pohybem směrem ven a lehce nahoru k spánkům**
- Pohyb je **velmi jemný, pomalý a plynulý**

5. Tváře

- Začni u nosu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k uším a lehce nahoru**
- Pohyby mohou být:
 - obloukové
 - nebo krátké tahy směrem vzhůru
- Cílem je **podpora liftingového efektu**

6. Oblast nad horním rtem

- Neaplikuj přímo na rty
- Pohybuj hlavicí **od středu nad horním rtem směrem šikmo nahoru k nosním křídlům**
- Pohyb je **jemný a krátký**

METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU

7. Okolí úst

- Začni u koutků úst
- Veď pohyb **směrem ven a lehce nahoru**
- Vyhni se přímému kontaktu se rty
- Pohyby jsou **obloukové, zjemňující mimické linie**

8. Brada a oblast pod bradou

- Na bradě veď pohyby **od středu brady do stran**
- Pod bradou pohybuj hlavicí **směrem vzhůru k čelisti**
- Pohyby jsou **tažené nahoru**, podporující zpevnění kontur

9. Krk

- Pohyby veď **od spodní části krku směrem vzhůru k bradě**
- Na stranách krku můžeš vést pohyb **šikmo nahoru**
- Vyhni se silnému tlaku v oblasti štítné žlázy

10. Dekolt


- Začni u středu dekoltu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k ramenům**
- Pohyby jsou **široké, plynulé a jemně tažené**

Obecná doporučení

- Pohyby jsou vždy **plynulé, pomalé a kontrolované**
- Netlač, nech hlavicí klouzat po pleti

Vždy se snaž pohybovat **směrem nahoru nebo ven**, nikoli dolů

MAPA CITLIVOSTI PLETI

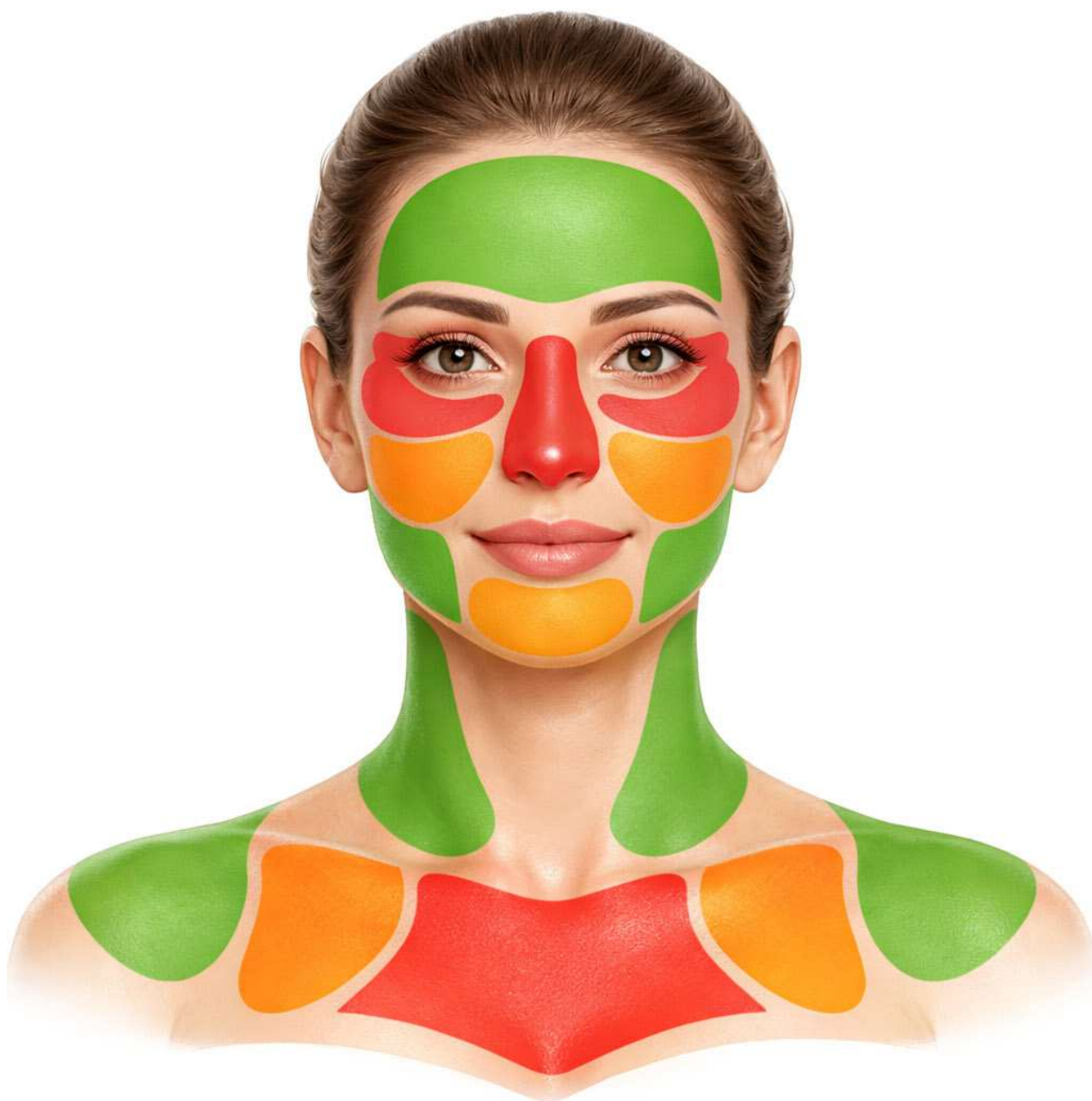

● NÍZKÁ CITLIVOST

● STŘEDNÍ CITLIVOST

● VYSOKÁ CITLIVOST

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhněte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

Radiofrekvence zahřívá hlubší vrstvy kůže, čímž stimuluje tvorbu kolagenu, ale krátkodobě může způsobit vazodilataci (rozšíření cév) a pocit tepla.

CO JE NORMÁLNÍ PO APLIKACI

- zarudnutí (obvykle ustoupí do 1–24 hodin),
- pocit tepla nebo „horké pleti“,
- mírný otok,
- jemná citlivost.

JAK POKOŽKU CO NEJLÉPE ZKLIDNIT

1) Chladit, ale ne ledem přímo

- Použijte **chladivý gelový sáček** nebo **studený obklad** zabalený v látce
- Chladte přibližně 5 až 10 minut v intervalech
- Nepřikládejte led přímo na kůži – může to způsobit podráždění či poškození

2) Nanést zklidňující přípravky

Vhodné jsou:

- **aloe vera gel** (čistý, bez parfemace),
- **panthenol** (např. ve formě pěny nebo krému),
- **termální voda ve spreji**,
- produkty s **niacinamidem** (snižuje zarudnutí),
- lehké **hydratační krémy bez alkoholu a parfemace**.

Vyhněte se:

- aktivním látkám jako **retinol, AHA/BHA kyseliny, vitamín C**,
- parfémovaným nebo mastným krémům.

3) Vyhnout se teple 24–48 hodin

To znamená:

- sauna
- solárium
- horké sprchy
- intenzivní sportování (zvýšení teploty a pocení prodlouží zarudnutí)
- přímé slunce

4) Neškrábat a nedráždit pokožku

- Nemačkejte, nedrhňte, nepoužívejte peelingy.
- Pleť ponechejte v klidu.

5) Použít SPF

- Pokud jdete ven, naneste **SPF 30–50**, i když je zataženo.
- Pleť je po radiofrekvenci citlivější na UV záření.

JAK DLOUHO MŮŽE POCIT TEPLA TRVAT?

- Běžné reakce odezní během **několika hodin až jednoho dne**.
- Citlivé pleti to může být **až 48 hodin**.

DOPORUČENÝ PLÁN APLIKACE

1) Počáteční fáze – první výsledky

- **Frekvence:** 1× týdně během prvních 3–4 týdnů
- **Proč:** RF stimulace podporuje tvorbu kolagenu a elastinu, ale tělo potřebuje čas reagovat — častější týdenní aplikace podporuje aktivaci remodelace tkáně.
- **Cíl:** viditelnější zpevnění pleti a snížení jemných vrásek.

2) Stabilizace efektu

- **Frekvence:** 1× za 2–4 týdny další 2–3 aplikace
- **Proč:** během této fáze tělo dále posiluje kolagenová vlákna a výsledek se začíná stabilizovat.
- **Cíl:** hlubší liftingový efekt s dlouhodobější výdrží.

3) Údržba výsledku

- **Frekvence:** 1× za 3–4 měsíce
- **Proč:** protože Thermage-typické RF aplikace vykazuje účinek, který se může udržet půl roku až rok (v některých studiích až 1–2 roky) — pravidelná údržba zachová pružnost pokožky.
- **Cíl:** udržet výsledky bez výrazné ztráty efektu.

Jak to implementovat

Tento plán je obecné doporučení:

- Výsledky budou záviset na **stavu pleti, věku, životním stylu a intenzitě použití přístroje**.
- Proto je dobré začít spíš *konzervativně* a sledovat reakci pleti po každé aplikaci.

Bezpečnostní tipy

Začněte vždy s nižší intenzitou a sledujte reakci pleti. Mezi jednotlivými aplikacemi nechte pokožku **odpočinout minimálně 5–7 dní**. Pokud se objeví podráždění — přidejte delší pauzu (10–14 dní). Nepoužívejte při **zánětech, poraněné kůži, těhotenství či nemocích** bez rady.

Fáze Frekvence

Počáteční 1× týdně (3–4 týdny)

Stabilizace 1× za 2–4 týdny

Údržba 1× za 3–4 měsíce

ROČNÍ PLÁN APLIKACE (12 MĚSÍCŮ)

LEDEN – ÚNOR

Aktivační kúra (nastartování kolagenu)

Frekvence: 1× týdně

Celkem:

- Leden: 4 aplikace
- Únor: 4 aplikace

Cíl:

- nastartování tvorby kolagenu
- zpevnění pleti po zimě
- zlepšení kontur obličeje

Ideální období – méně slunce, pleť regeneruje.

BŘEZEN – DUBEN

Stabilizace efektu

Frekvence: 1× za 14 dní

Celkem:

- Březen: 2 aplikace
- Duben: 2 aplikace

Cíl:

- upevnění liftingového efektu
- zjemnění vrásek
- sjednocení pleti

KVĚTEN – SRPEN

Udržovací fáze (léto)

Frekvence: 1× za 4–6 týdnů

Celkem:

- Květen: 1 aplikace
- Červen: 1 aplikace
- Červenec: 1 aplikace
- Srpen: 1 aplikace

Cíl:

- udržet výsledky
- zabránit ochabování
- minimální zátěž pleti v létě

Důležité v létě:

- neprovádět aplikaci **2–3 dny před intenzivním sluncem**
- vždy používat **SPF 30–50**

ZÁŘÍ – ŘÍJEN

Regenerační podzimní kúra

Frekvence: 1× za 2 týdny

Celkem:

- Září: 2 aplikace
- Říjen: 2 aplikace

Cíl:

- regenerace po létě
- znovuoaktivace kolagenu
- viditelné vypnutí pleti

Druhé nejsilnější období v roce (po zimě nejlepší výsledky).

LISTOPAD – PROSINEC

Lehká aktivace + příprava na zimu

Frekvence: 1× za 3–4 týdny

Celkem:

- Listopad: 1 aplikace
- Prosinec: 1 aplikace

Cíl:

- udržení pevnosti
- prevence ochabnutí
- pěkná pleť na svátky

SOUHRN ZA CELÝ ROK

Období	Počet aplikací
Leden–Únor	8
Březen–Duben	4
Květen–Srpen	4
Září–Říjen	4
Listopad–Prosinec	2
CELKEM	22 aplikací / rok

ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU

1. ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Odstranění sonogelu/nanášeného přípravku.
- Hlavici otřete měkkým, suchým ubrouskem (např. mikrovlákno) nebo vatičkou.
- Pokud je gel zaschlý, můžete použít vlhčený ubrousek bez alkoholu (určený pro elektroniku).

2. DEZINFEKCE (POKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ VÍCE OSOB)

Postup dezinfekce:

- Nastříkejte isopropylalkohol (70–80%) ve spreji na hadřík (NE přímo na hlavici!).
- Jemnými pohyby otřete povrch hlavice.
- Nechte zcela vyschnout (alkohol se rychle odpaří).

Pozor! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (aceton, čpavek, chlor).

3. OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

- Hlavici NENAMÁČEJTE – voda by mohla poškodit elektroniku.
- Po čištění vždy důkladně osušte suchým hadříkem.

4. DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA

- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, aplikujte na kovové části hlavice tenkou vrstvu antiseptického přípravku (např. lékařský alkohol), aby nedošlo k oxidaci.
- Skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

5. UPOZORNĚNÍ

- Neponořujte hlavici do vody ani čisticích roztoků!
- Nepoužívejte abrazivní materiály (kartáče, drátěnky)!
- Nepoužívejte horkou vodu nebo páru!

DOPORUČENÍ PRO PRODLUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

- Čistěte hlavici ihned po použití – zabráníte zasychání gelu.
- Při dezinfekci používejte pouze isopropylalkohol – nepoškozuje materiály.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození (praskliny, koroze).


ŽIVOTNOST APLIKAČNÍCH HLAVIC

Vyměnitelné aplikační hlavice nemají neomezenou životnost. Povrch kontaktní plochy elektrody představuje vysoce sofistikovanou elektronickou součást, která je při používání přístroje opakovaně vystavena vodivému gelu. Obecně platí, že elektronika a vlhkost nejsou ideální kombinací.

I při maximálně pečlivé údržbě, zejména při důkladném osušení aplikační hlavice po každém použití, dochází v průběhu času k postupné degradaci kontaktní plochy, nejčastěji vlivem oxidace. Tato degradace se projeví sníženou účinností aplikace na pleti.

Jakmile životnost aplikační hlavice skončí, je nutné ji vyměnit za novou. V takovém případě doporučujeme kontaktovat prodejce a objednat novou sadu aplikátorů.

Jednou z významných výhod tohoto přístroje je skutečnost, že jeho celková životnost není omezena životností aplikačních hlavic. Není tedy nutné pořizovat nový přístroj – postačí pouze výměna opotřeбенých hlavic za nové.

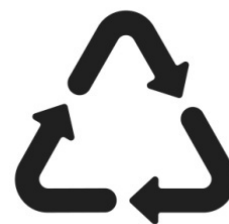

PÁR VĚT ZÁVĚREM

Pokud hledáte vysoce účinný nástroj pro zlepšení kondice pleti. Pokud je vaše hlavní priorita zlepšení kondice pleti. Potřebujete přístroj, který nabízí vysoký rozsah nastavení výkonu. Přístroj, který vydrží velmi vysokou zátěž při komerčním provozu. Pokud jste opravdu velmi nároční na dosažitelné výsledky. Přístroj, který nejen slibuje, ale skutečně bude fungovat, model **FRAXLIFT TRIPPLE ATTACK** je určený přesně pro vás. Někdy i samotný výběr vhodné technologie není vše. Hlavním klíčem ke kvalitnímu a efektivnímu použití na pleti je široká škála nastavení funkcí přístroje pro individuální potřeby uživatele. Model **FRAXLIFT TRIPPLE ATTACK** vás příjemně překvapí výběrem z 3 vyměnitelných hlavic. Nezáleží na tom, že si oblíbíte pouze jeden typ, který budete stále používat. Přesto budete mít stále dobrý pocit, že v případě potřeby můžete hlavici vyměnit. Jako jeden z prvních modelů má elektronickou kontrolu kvality dotyku hlavice s pletí. Průběh použití na pleti tak máte stále pod kontrolou. Jak bylo již výše uvedeno. Opravdu věnujte zvýšenou pozornost práci s výkonem. K dispozici je vám až 20 úrovní. V praxi ty nejvyšší pravděpodobně ani nevyužijete. Přesto je dobré, že máte stále „po ruce“ dostatečně velký výkonnostní potenciál, což oceníte hlavně v případech, kdy poskytujete službu svým zákazníkům. Pevně věřím, že přístroj splní vaše očekávání. Po několika opakovaných použití s ním budete díky snadnému ovládání pracovat jako skutečný profesionál!

Martin Hrbek

www.beautyrelax.cz

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma SANTADRIA s.r.o. IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454 tímto výslovně prohlašuje, že nenese odpovědnost za jakékoliv jednání, způsob, použití či aplikaci produktu ze strany zákazníka. Zákazník je plně odpovědný za veškeré následky vyplývající z užívání produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za právní důsledky způsobené tím, že by produkt mohl být v rozporu s platnou legislativou, obzvláště s legislativou týkající se podmínek pro používání přístrojů obdobného typu s ohledem na komerční použití přístroje zákazníkem. Jakákoliv povinnost zjišťovat splnění právních předpisů je na straně zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že je jeho výhradním úkolem zajistit, aby použití produktu bylo v souladu se zákony, předpisy a normami aplikovatelnými v konkrétní jurisdikci. Tento text představuje úplnou a konečnou dohodu o vyloučení odpovědnosti prodávajícího za aplikační účely produktu a nahrazuje jakoukoliv předchozí ústní či písemnou komunikaci týkající se odpovědnosti za produkt.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454



PO - PÁ 11:00 - 18:00
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Kosmetický přístroj FRAXLIFT TRIPPLE ATTACK

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2822**

EAN **8594166120396**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 61000-3-2:2006 EN 60601-1-2:2007

EN 60601-1:2006 EN 61000-3-3-1995+A1:2001+A2:2005


EN 55011:2007

Produkt je svým provedením, výkonem a užitnými vlastnostmi vhodný pro komerční účely do masážního nebo kosmetického studia. **Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Teplota působení radiofrekvence 40°C.**

Přístroj nenarušuje integritu pleti. Nabízí neinvazivní aplikaci na pleti. Je určen pro příjemné prohrátí pleti teplem.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.

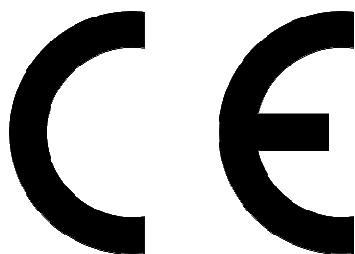

Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

30.1.2022

Martin Hrbek, jednatel