

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-2956

MEZOMAX RF PROFESSIONAL



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
SLOVO ÚVODEM	5
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	6
UPOZORNĚNÍ	7
POUŽITÍ KOSMETICKÉHO PŘÍPRAVKU	8
POUŽITÍ SONOGELU	8
KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT	9
DOPORUČENÉ PARTIE APLIKACE	9
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	9
VLASTNOSTI&SPECIFIKACE	10
TECHNICKÉ PARAMETRY	10
OBSAH BALENÍ	10
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	11
METODY REDUKCE VRÁSEK	11
INVAZIVNÍ MEZOTERAPIE	12
NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE	13
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	14
POPIS PŘÍSTROJE	15
POPIS APLIKAČNÍ HLAVICE	18
POPIS DISPLEJE	19
POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ DISPLEJE	21
INSTALACE PŘÍSTROJE	23
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	24
METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU	25
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	26
ČAS APLIKACE	26
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	27
NÁSLEDNÁ PÉČE O PLEŤ PO APLIKACI	28
NÁHRADNÍ SADA KONTAKTNÍCH ČIPŮ	29
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	30
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	32
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	33
CERTIFIKACE	33
EU DISTRIBUTOR	33
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	34

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – Špičková technologie krásy pro domácí i profesionální použití

Vítejte ve světě profesionální estetiky v pohodlí domova! BeautyRelax je ryze česká značka, která od roku 2010 přináší inovativní přístroje pro péči o pleť, tělo a vlasy. Naše zařízení kombinují nejmodernější technologie s jednoduchým ovládáním, takže si můžete dopřát salonní péči bez nutnosti návštěvy kosmetického studia.



Proč si vybrat BeautyRelax?

Vysoká účinnost – Používáme stejné technologie jako profesionální salony (radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud).

Univerzální použití – Vhodné pro domácí i komerční využití.

Odborné poradenství – Pomůžeme vám vybrat ideální přístroj na míru vašim potřebám.

Nadstandardní služby – Rychlé doručení, záruční a pozáruční servis.

Naše kategorie přístrojů

Kosmetické přístroje – Pro dokonalou pleť bez vrásek, akné nebo pigmentace.

Přístroje na formování postavy – Redukce celulitidy, lifting a modelace kontur.

Masážní technologie – Lymfatické masáže, relaxace a regenerace svalů.

IPL depilace – Trvalé odstranění chloupků šetrnou cestou.

Salonní péče v domácích podmínkách

Díky pokrokům v estetických technologiích si nyní můžete dopřát stejně účinná aplikace jako v kosmetickém studiu – bez bolestivých zákroků a dlouhého čekání. Ať už řešíte:

- Vrásky, povadlou pleť nebo nedostatek elasticity
- Celulitidu, ochablé kontury nebo otoky
- Nechtěné chloupky nebo problematickou pokožku

S BeautyRelax dosáhnete viditelných výsledků šetrně, bezpečně a bez nepříjemných pocitů.

Vize zakladatele

„Od začátku naší cesty je naší prioritou zpřístupnit špičkové estetické technologie každému. Ať už hledáte přístroj pro osobní péči, nebo profesionální studio, nabízíme řešení s vysokou užitnou hodnotou, dlouhou životností a rychlou návratností investice.“

Martin Hrbek, zakladatel a odborný konzultant BeautyRelax

Ušetřete čas i peníze

Pravidelným používáním přístrojů BeautyRelax můžete výrazně snížit náklady na kosmetické procedury a zároveň mít svou péči plně pod kontrolou.

- Výsledky bez bolesti a zbytečného stresu
- Šetrná neinvazivní řešení pro všechny typy pleti
- Vybírejte z desítek modelů pro různé potřeby

Objevte kouzlo moderní estetiky a vyberte si svůj ideální přístroj v naší kompletní nabídce. Těšíme se, že s námi budete sdílet vášně pro krásu a inovace!



(+420) 737 196 160
 mh@santadria.cz
 shop.beautyrelax.cz
 www.beautyrelax.cz
 facebook.com/BeautyRelaxEquipment







prodej | servis | poradenství | konzultace | školení
MARTIN HRBEK odborný konzultant a školitel
 SANTADRIA s.r.o. Mojžírovo nám. 75/2 Brno 62100 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně vašeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Estetický přístroj pro neinvazivní aplikaci vybraných částí těla pracuje s technologiemi, které jsou bezbolestné a bezpečné. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost splňuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených bezpečnostních norem. Aby bylo možné efektivně stimulovat vrstvu dermis, kde se nachází kolagenní a elastická vlákna zodpovědná za kondici pleti, pracuje přístroj s určitým výkonem. Pokud nebudete postupovat dle uvedených pokynů, nebudete ctít upozornění a výčet kontraindikací, můžete si váš zdravotní stav v krajním případě negativně ovlivnit. Na druhou stranu nemějte z používání přístroje obavu.

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie estetických přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek.** Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají zvýšení pružnosti pleti a především vysoce efektivní zapracování kosmetického přípravku do pleti.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní aplikaci. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky neprotrhne kůži.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Aplikace je vždy spojena minimálně s čirým vodivým gelem (sonogel). Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlépe dostupný. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Radiofrekvence a EMS pulzy získají lepší schopnost navázat na pleť.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví. Pleť po aplikaci dostatečně hydratujte běžně dostupnými kosmetickými přípravky. Výrazně tak přispějete k lepšímu průběhu její regenerace.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.

Tým BeautyRelax.cz

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax MEZOMAX RF PROFESSIONAL je přístroj, který je určen pro kosmetické použití na pleti na velmi kvalitní a profesionální úrovni. Přístroj není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Přístroj neposkytuje prostřednictvím aplikačních hlavic žádnou technologii, která by narušila integritu pleti. Nevyužívá žádné jehly. Žádná část z aplikačních hlavic nikdy nepronikne skrz povrch pleti. Přístroj byl vyvinut tak, aby napomohl zpracovat účinné látky do pleti neinvazivním způsobem.

Rozsah licence pro využívání jednotlivých technologií za účelem komerčního používání je dána zákonem v každé zemi Evropské unie. Ten stanoví, jaká je třeba úroveň erudice pro jednotlivé technologie, které přístroj nabízí. Respektive dosaženou úroveň vzdělání/licence pro přístroj obdobného typu.



Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenesí žádnou odpovědnost za používání přístroje za podmínek, které jsou v rozporu s legislativou v dané zemi používání. Provozovatel může veřejně pro komerční použití pracovat pouze s funkcemi a technologiemi přístroje, na které má oprávnění dle aktuálně platného znění zákona/vyhlášky. Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenesí žádnou odpovědnost za škody, které vznikly v rozporu s používáním podmínek stanovených v tomto návodu k obsluze.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Instalaci přístroje provádějte podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny. Po každém použití je třeba důkladně dezinfikovat aplikační hlavici roztokem na bázi alkoholu.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Žádná z jeho součástí nesmí být ponořena do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj v průběhu používání žádným způsobem nezakrývejte, zejména mřížku ventilátoru.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- **Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.**
- **Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.**



POUŽITÍ KOSMETICKÉHO PŘÍPRAVKU

Skleněnou ampulku můžete naplnit přípravkem podle vašeho výběru. Doporučujeme sledovat množství účinných látek v konkrétním přípravku. Čím je větší, tím více vám jich přístroj pomůže zapracovat do pleti. Může se jednat o jakýkoliv kosmetický přípravek na tekuté bázi. Pokud je hustota větší, můžete přípravek naředit destilovanou nebo kojeneckou vodou (kohoutková voda může obsahovat nežádoucí množství vodního kamene). Konzistence by měla být taková, aby se byl přípravek schopen uvolňovat přes kontaktní elektronický čip.



POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno minimálně (pokud nepoužijete kosmetický přípravek) s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné minimum. Přístroj nepoužívejte na suchou pleť. Sonogel může nahradit kosmetický přípravek, který se dává z ampulky.

KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (neplatí pro zubní implantáty a další typy náhrad v dutině ústní)
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství



DOPORUČENÉ PARTIE APLIKACE

- Obličej
- Krk
- Dekolt



DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma SANTADRIA s.r.o. IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454 tímto výslovně prohlašuje, že nenese odpovědnost za jakékoliv jednání, způsob, použití či aplikaci produktu ze strany zákazníka. Zákazník je plně odpovědný za veškeré následky vyplývající z užívání produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za právní důsledky způsobené tím, že by produkt mohl být v rozporu s platnou legislativou, obzvláště s legislativou týkající se podmínek pro používání přístrojů obdobného typu s ohledem na komerční použití přístroje zákazníkem. Jakákoliv povinnost zjišťovat splnění právních předpisů je na straně zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že je jeho výhradním úkolem zajistit, aby použití produktu bylo v souladu se zákony, předpisy a normami aplikovatelnými v konkrétní jurisdikci. Tento text představuje úplnou a konečnou dohodu o vyloučení odpovědnosti prodávajícího za aplikační účely produktu a nahrazuje jakoukoliv předchozí ústní či písemnou komunikaci týkající se odpovědnosti za produkt.

VLASTNOSTI&SPECIFIKACE

- Technologie: neinvazivní mezoterapie, radiofrekvence, EMS mikropulzy, fotonová terapie.
- Inovativní technologie mezoterapie pomocí elektroforézy.
- Radiofrekvence pro podporu tvorby kolagenu a elastických vláken.
- Modré světlo pro posílení obličejových svalů.
- Obličejová maska s fotonovou terapií pro komplexní použití na pleti světelnou terapií.
- Hlavice penetruje hluboko pod povrch pleti tekuté kosmetické ampulkové tekuté přípravky.
- Neinvazivní metoda aplikace na pleti (žádná část aplikátoru neprochází skrz pokožku).
- Zlepšuje celkovou kondici pleti.
- Snadné dávkování výkonu pro aplikaci všech typů pleti.
- Dostatečně dlouhý kabel pro snadnou práci s aplikační hlavici.
- Velký barevný dotykový displej velikost 7".
- Možnost plynulého dávkování radiofrekvence a EMS pulzů.
- Plynulé dávkování množství tekutého přípravku ze zásobníku.
- Možnost nastavení funkcí na displeji nebo aplikační hlavici.
- Bezpečné a bezbolestné použití.
- Hlavice pro neinvazivní mezoterapii.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Aplikace trvá v délce 20 až 30 minut.
- Radiofrekvence: 2 až 4MHz.
- Radiofrekvence teplota 42°C.
- EMS mikropulzy: 1 až 2Mhz.
- Napájení: síťový adaptér 220V.
- Rozměry: 48x40x14cm.
- Hmotnost: 6kg.

OBSAH BALENÍ

- 1x Hlavní jednotka BeautyRelax BR-2956
- 1x Multifunkční aplikační hlavice
- 2x Skleněná ampulka na kosmetický přípravek
- 1x Sonogel
- 1x Napájecí kabel 220V
- 1x Prodlužovací kabel 220V
- 1x Návod k obsluze

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojová aplikace pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

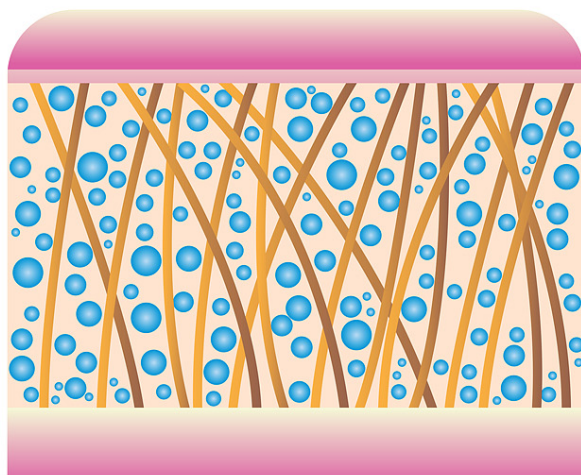

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

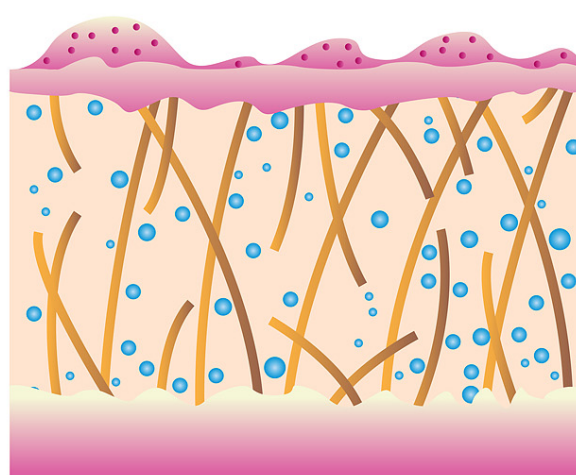

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

INVAZIVNÍ MEZOTERAPIE

Mezoterapie je kosmetický postup, při němž jsou do pokožky malé injekce aplikovány pod kůži, aby se zlepšil vzhled pleti nebo řešily konkrétní problémy, jako jsou vrásky, celulitida, pigmentové skvrny nebo ztráta elasticity pleti. Tato technika byla poprvé vyvinuta v roce 1952 francouzským lékařem Michaellem Pistor, a od té doby byla stále více využívána v kosmetickém průmyslu.

Princip invazivní mezoterapie spočívá v aplikaci (pomocí jehly nebo sady jehliček) malých dávek léčivých látek, vitamínů, minerálů a antioxidantů přímo do dermis (střední vrstva kůže) nebo do mezodermální oblasti, což je vrstva pod kůží.

Tato metoda má několik potenciálních výhod:

Zlepšení vzhledu pleti

Mezoterapie může pomoci zlepšit texturu pleti, snížit vrásky a jemné linky a zvýšit pružnost kůže.

Boj s celulitidou

Při aplikaci do oblastí s celulitidou mohou mezoterapeutické injekce pomoci rozkládat tukové buňky a zlepšovat vzhled pokožky.

Redukce pigmentových skvrn


Mezoterapie může být použita k redukci pigmentových skvrn a nerovnoměrné pigmentace.

Ztráta hmotnosti

V některých případech se mezoterapie používá k podpoře hubnutí tím, že se aplikují léčivé látky, které pomáhají rozpouštět tukové buňky.

Výživa pleti

Injekce vitamínů a antioxidantů mohou poskytnout pleti potřebné živiny pro zdravý vzhled.

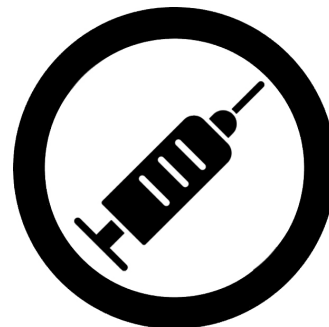

NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE

Neinvazivní mezoterapie, někdy nazývaná mezoterapie bez jehel, je metoda, která se snaží dosáhnout podobných výsledků jako tradiční injekční mezoterapie, ale bez použití jehel nebo invazivních postupů. Hlavním principem neinvazivní mezoterapie je aplikace léčivých látek a živin do pokožky bez potřeby provádět injekce. Tento postup může mít několik forem, zahrnující následující techniky:



Radiofrekvence

Radiofrekvence patří v oblasti estetiky mezi nejúčinnější metodu neinvazivního liftingu pleti. Aplikační hlavice přenáší do pleti radiofrekvenční vlny ve specifické frekvenci. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Přispívá k přirozené tvorbě vlastního kolagenu. V průběhu aplikace je možné na pleti cítit příjemné teplo. Maximální možné zacílení radiofrekvenční energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Účinné zejména pro aplikaci zralé pleti s výskytem viditelných hlubokých vrásek. Možnost plynulého dávkování výkonu pro aplikaci pleti s různou citlivostí. V kombinaci se speciálním mikročipem napomáhá penetrovat pod povrch pleti účinné látky z tekutých kosmetických přípravků.

EMS mikropulzy

Kontaktní plocha aplikační hlavice generují EMS pulzy. Elektrické pulzy cílí přímo na strukturu svalových vláken. Stejným způsobem fungují klasické elektrostimulátory, které prostřednictvím gelových nalepovacích elektrod stimulují svaly na vybraných částech těla. Elektrické pulzy kosmetického přístroje pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. Zvýrazníte kontury obličeje.

Elektroporace

Elektroporace využívá elektrické impulsy, které dočasně zvyšují propustnost buněčných membrán v kůži. To umožňuje léčivým látkám proniknout hlouběji do pokožky, kde mohou působit na konkrétní problémy, jako jsou vrásky nebo pigmentové skvrny.

Iontoforéza

Ionoforéza využívá elektrický proud k transportu iontů a léčivých látek přes pokožku. Tato technika je často používána k dodání vitamínů a antioxidantů do pleti.

Ultrazvuková mezoterapie

Ultrazvuková technologie může být použita k aplikaci léčivých látek do pokožky pomocí ultrazvukových vln, což umožňuje léčivým látkám proniknout hlouběji.

Hlavním cílem neinvazivní mezoterapie je dosáhnout vylepšení vzhledu pleti a řešení různých kosmetických problémů, včetně vrásek, celulitidy, pigmentových skvrn a ztráty elasticity pleti. Tato metoda je obvykle považována za méně invazivní než tradiční mezoterapie s jehlami a může být vhodná pro lidi, kteří se obávají bolesti nebo invazivních postupů. Je však důležité vyhledat kvalifikovaného profesionála, který má zkušenosti s neinvazivní mezoterapií, a provést konzultaci, aby byly stanoveny cíle a individuální potřeby.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Mezomax RF Professional je špičkový profesionální přístroj pro komplexní aplikaci pleti pomocí tří technologií. Pro aplikaci na pleti je zvolena optimální kombinace neinvazivní mezoterapie, radiofrekvence a EMS pulzů. Přístroj posouvá klasickou jehličkovou mezoterapii na zcela jinou dimenzi použití. Maximální hydratační efekt. Dokonalá výživa pleti. Podpora tvorby kolagenu. Zvýšení pružnosti pleti. Výrazný liftingový účinek zralé pleti. Zlepšuje pružnost pokožky. Tři účinné technologie v jednom přístroji. Možnost plynulého dávkování výkonu. Dlouhá životnost přístroje.



POPIS PŘÍSTROJE

1. Dotykový displej
2. Ampulka na kosmetický přípravek
3. Aplikační hlavice
4. Držák aplikační hlavice
5. Kontaktní plocha aplikační hlavice
6. Stojan těla přístroje




POPIS PŘÍSTROJE

1. Konektor aplikační hlavice
2. Konektor napájení přístroje
3. Čtečka ID karty (režim čtení ID karty je trvale deaktivovaná)
4. Dotykový displej



POPIS PŘÍSTROJE

1. *Aplikační hlavice*
2. *Držák aplikační hlavice*
3. *Mřížka ventilátoru přístroje*
4. *Konektor pro připojení kabelu aplikační hlavice*
5. *Konektor pro připojení napájecího kabelu*
6. *Hlavní tlačítko ON/OFF*

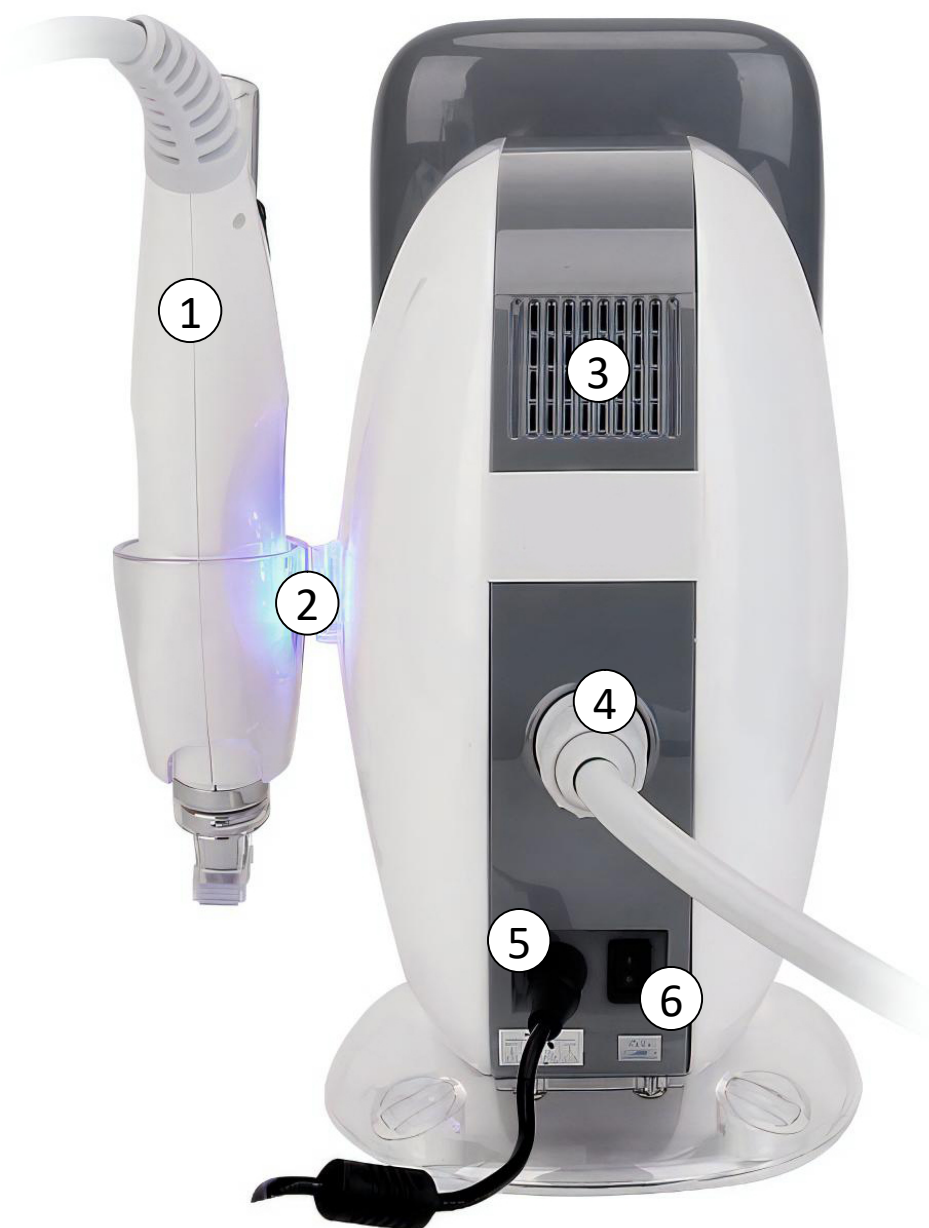

POPIS APLIKAČNÍ HLAVICE

1. Ampulka pro kosmetický přípravek
2. Tlačítko množství kosmetického přípravku
3. Tlačítko rychlost pohybu kontaktní plochy
4. Tlačítko START/STOP
5. Koncovka aplikační hlavice
6. Elektronický čip pro kontakt s pletí




SPRÁVNÁ POZICE GUMOVÉ OBJÍMKY



Provádějte pravidelnou kontrolu polohy gumové objímky. Musí být vždy v pozici číslo jedna - **SPRÁVNĚ**. Pokud budete mít gumovou objímku v pozici dva - **NESPRAVNĚ**, krystal bude vyjíždět příliš moc z hlavice ven a při kontaktu s pletí bude aplikátor poskakovat. Pozici kontrolujte především při výměně krystalu.



POPIS DISPLEJE

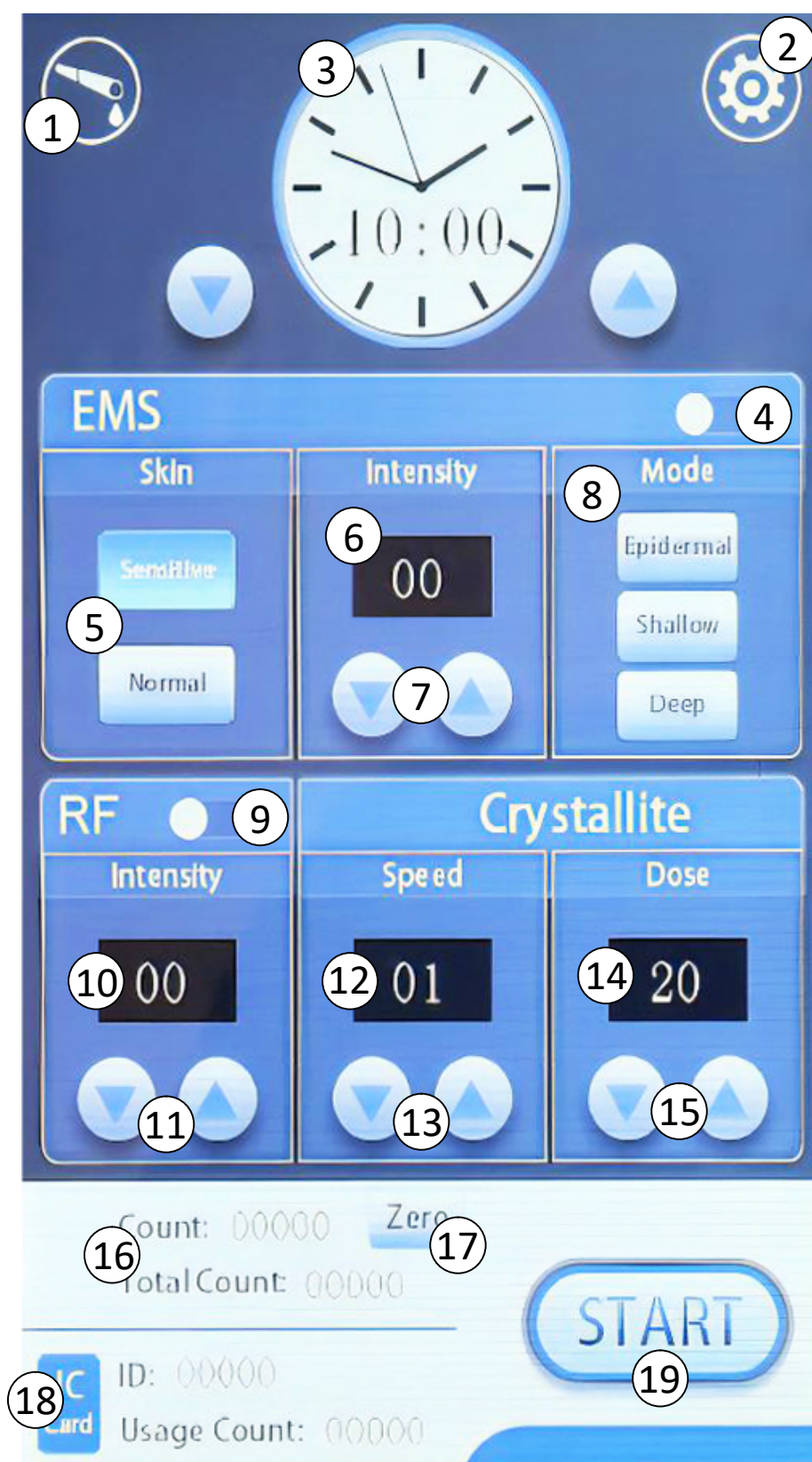

POPIS DISPLEJE

- 1.** *Tlačítko pro aktivaci režimu čištění hlavice*
- 2.** *Tlačítko nastavení jazyku menu*
- 3.** *Přehled o čase použití přístroje (změna časovače pomocí šipek)*
- 4.** *Tlačítko zapnutí/vypnutí EMS*
- 5.** *Volba citlivosti pleti (SENSITIVE, NORMAL)*
- 6.** *Zobrazení intenzity EMS*
- 7.** *Zvýšení/snížení intenzity působení EMS pulzů*
- 8.** *Nastavení hloubky působení EMS (epidermal, shallow, deep)*
- 9.** *Tlačítko zapnutí/vypnutí radiofrekvence*
- 10.** *Zobrazení intenzity radiofrekvence*
- 11.** *Zvýšení/snížení intenzity působení radiofrekvence*
- 12.** *Zobrazení rychlosti pohybu aplikační hlavice*
- 13.** *Zvýšení/snížení rychlosti pohybu aplikační hlavice*
- 14.** *Zobrazení množství uvolnění kosmetického přípravku*
- 15.** *Zvýšení/snížení množství uvolnění kosmetického přípravku*
- 16.** *Počítadlo kmitů kontaktní plochy aplikační hlavice*
- 17.** *Vynulování počítadla*
- 18.** *Kontrola načtení ID karty (režim čtení karty je trvale deaktivován)*
- 19.** *Tlačítko START/STOP*

POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ DISPLEJE

1. **Tlačítko pro aktivaci režimu čištění hlavice**
Vstup do režimu pro čištění kontaktní plochy aplikační hlavice.
2. **Tlačítko nastavení jazyku menu**
Nastavení jazyku menu přístroje (pracujte s angličtinou)
3. **Přehled o čase použití přístroje**
Odpočítávání času použití přístroje.
4. **Tlačítko zapnutí/vypnutí EMS**
Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí EMS pulzů. Můžete aktivovat po stisknutí tlačítka START.
5. **Volba citlivosti pleti (SENSITIVE, NORMAL)**
Volba citlivosti pleti uživatele pro působení funkce EMS.
SENSITIVE = CITLIVÁ, NORMAL = NORMÁLNÍ.
6. **Zobrazení intenzity EMS**
Zobrazení nastavené funkce EMS pulzů. K dispozici je rozsah nastavení od 1 (nejnižší) do 20 (nejvyšší).
7. **Zvýšení/snížení intenzity působení EMS pulzů**
Pomocí tlačítek si v průběhu použití hlavice můžete upravit intenzitu působení EMS pulzů.
8. **Nastavení hloubky působení EMS (epidermal, shallow, deep)**
Pomocí tlačítek si můžete nastavit 3 úrovně působení hloubky EMS pulzů (epidermal – nejmělkčí, shallow - střední, deep - hluboká).
9. **Tlačítko zapnutí/vypnutí radiofrekvence**
Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí radiofrekvence.
10. **Zobrazení intenzity radiofrekvence**
Zobrazení nastavené funkce radiofrekvence. K dispozici je rozsah nastavení od 1 (nejnižší) do 20 (nejvyšší).
11. **Zvýšení/snížení intenzity působení radiofrekvence**
Pomocí tlačítek si v průběhu použití hlavice můžete upravit intenzitu působení radiofrekvence.
12. **Zobrazení rychlosti pohybu aplikační hlavice**
Zobrazení rychlosti pohybu aplikační hlavice. K dispozici je rozsah nastavení od 1 (nejnižší) do 9 (nejvyšší).
13. **Zvýšení/snížení rychlosti pohybu aplikační hlavice**
Pomocí tlačítek si v průběhu použití hlavice můžete upravit rychlost pohybu aplikační hlavice.
14. **Zobrazení množství uvolnění kosmetického přípravku**
Zobrazení množství uvolnění kosmetického přípravku. K dispozici je rozsah nastavení od 1 (nejnižší) do 20 (nejvyšší).
15. **Zvýšení/snížení množství uvolnění kosmetického přípravku**
Pomocí tlačítek si v průběhu použití hlavice můžete upravit množství kosmetického přípravku, který aplikační hlavice načerpává z ampulky. Nastavte si takové množství, které vám bude nejvíce vyhovovat.
16. **Počítadlo kmitů kontaktní plochy aplikační hlavice**
Počítadlo kmitů kontaktní plochy aplikační hlavice při jednom zapnutí přístroje.

17. Vynulování počítadla

Tlačítko pro vynulování počítadla.

18. Kontrola načtení ID karty

Indikace načtení ID karty (u přístroje je tato funkce trvale deaktivována).

19. Tlačítko START/STOP

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí činnosti přístroje. Činnost přístroje můžete kdykoliv přerušit a znovu pokračovat.

INSTALACE PŘÍSTROJE

- 1.** Všechny části přístroje zbavte obalového materiálu.
- 2.** Hlavní jednotku umístěte na rovnou, suchou a plochu. Vždy dbejte na to, aby nebyla zakryta mřížka ventilátoru. Doporučujeme vybrat takové místo, které je blízko elektrické zásuvky. Pokud je délka kabelu napájecího adaptéru příliš krátká, použijte prodlužovací kabel. Napájecí kabel by neměl být v průběhu použití přístroje příliš napnutý.
- 3.** Hlavní jednotku přístroje připojte k napájecímu adaptéru. Jeden konec připojte do zdířky na zadní straně přístroje. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické sítě 220V.
- 4.** K hlavní jednotce připojte aplikační hlavici. Využijte zdířku na zadní straně přístroje. Při zapojení vždy dbejte na to, aby čárka na konektoru hlavice vždy směřovala nahoru. Konektor vždy připojte nadoraz.
- 5.** Přístroj zapněte stisknutím hlavního tlačítka do polohy 1. Zapnutí přístroje doprovází zapnutí displeje přístroje.
- 6.** Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí hlavního tlačítka na zadní straně přístroje do polohy 0.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka na zadní straně přístroje do polohy 1.
2. Aktivuje se displej. Zvolte jazyk angličtinu – **ENGLISH**.
3. Naplňte skleněnou ampulku kosmetickým přípravkem bez ohledu na značku. Vždy je důležité, aby bylo zachováno kapalně skupenství přípravku. V opačném případě by mohlo dojít k ucpání celého systému.
4. Pomocí šipek si můžete upravit nastavení časovače. Po uplynutí času se činnost přístroje zastaví.
5. Pro nastavení funkce EMS si zvolte parametr s ohledem na typ pleti. Zvolte režim pro aplikaci citlivé nebo normální pleti - **SENSITIVE/NORMAL**. Nebo můžete pracovat s hloubkou působení EMS pulzů **EPIDERMAL/SHALLOW/DEEP = NÍZKÁ/STŘEDNÍ/HLUBOKÁ**.
6. Nastavte si intenzitu působení EMS pulzů. K dispozici je rozsah od 1 (nejnižší) do 20 (nejvyšší).
7. Nastavte si intenzitu radiofrekvence. K dispozici je rozsah od 1 (nejnižší) do 20 (nejvyšší).
8. Funkce EMS a RF si po stisknutí tlačítka start můžete ZAPNOUT/VYPNOUT posuvným symbolem u značení funkce EMS a RF. V průběhu použití aplikační hlavice si tak můžete jednotlivé technologie zapínat nebo vypínat. Zvolte si takové parametry výkonu, které budou odpovídat potřebám konkrétního typu pleti.
9. Nastavte si pomocí parametru SPEED rychlost pohybu kontaktní plochy aplikační hlavice. K dispozici je rozsah od 1 (nejnižší) do 9 (nejvyšší). Nastavte si množství tekutiny, které se má na pleť načerpávat ze zásobníku (ampulky). K dispozici je rozsah od 1 (nejmenší množství) do 20 (nejvyšší množství).
10. Činnost aplikační hlavice aktivujete stiskem tlačítka **START**.
11. Chvilí vyčkejte, než čerpadlo nasaje tekutý kosmetický přípravek z ampulky. Nyní se aplikátorem pohybujte po pleti na vybraných místech obličeje, krku nebo dekoltu. V průběhu použití přístroje si můžete jednotlivé parametry funkcí měnit. Aktivně tedy můžete upravit intenzitu působení EMS pulzů, radiofrekvence, rychlosti pohybu kontaktní plochy aplikační hlavice (kontaktní elektronický čip) a množství dávkování tekutiny.
12. Činnost přístroje můžete kdykoliv pozastavit pomocí tlačítka **STOP**. Pokud se rozhodnete pokračovat v použití přístroje, stiskněte tlačítko **START**. Pro aktivaci funkce radiofrekvence nebo EMS pulzů je třeba tyto funkce znovu aktivovat.

METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

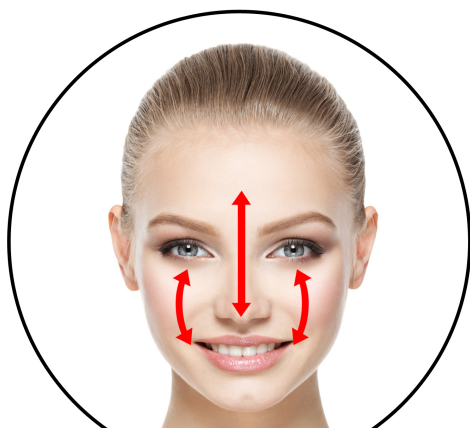

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE


1. Před každým použitím je třeba důkladně omýt pokožku a osušit. Ideálně můžete pokožku zahřát teplým ručníkem. Póry jsou působením tepla otevřeny. Pokožka je vláčnější.
2. Naplňte skleněnou ampulku kosmetickým přípravkem v tekuté formě. Ampulku připojte k aplikační hlavici.
3. V průběhu aplikace si můžete nastavit hned několik parametrů přístroje. Nelze přesně stanovit, jakou hodnotu nastavit pro konkrétní funkci. Vždy záleží na aktuální situaci a pleti uživatele. Hodnoty by neměly být nastaveny příliš vysoko. Přístrojová aplikace pleti by mělo být vždy za každých okolností příjemné pro osobu, která aplikaci podstupuje.
4. Pokud se na pleť načerpá větší množství přípravku, další uvolnění přípravku můžete dočasně pozastavit. Pomocí pohybu kontaktní plochy aplikační hlavice můžete přípravek snadno zapracovat do pleti.
5. Snažte se při použití v oblasti pod bradou, krku a dekoltu vyhnout intenzivní stimulaci míst, kde se nachází lymfatické uzliny a štítná žláza. Letmý kontakt nevadí. Dlouhá, intenzivní stimulace je zakázána.
6. Díky velmi malému rozměru elektronického čipu je přístroj přímo předurčen pro aplikaci menších částí obličeje s horší dostupností. Ideální je použití pro oblast kolem očí. Dbejte maximálně zvýšenou pozornost nastavení intenzity působení radiofrekvence a EMS pulzů. Zejména v oblasti kolem očí je pleť velmi tenká a vysoce citlivá.
7. Aplikační hlavice je primárně určena pro aplikaci obličeje a dekoltu. Použít ji můžete samozřejmě na libovolné tělesné partie. Díky menším rozměrům se můžete zaměřit na plochu s většími nerovnostmi a horší dostupností.
8. **Kontaktní elektronický čip má omezenou životnost. Nelze přesně stanovit frekvenci a četnost použití. V okamžiku, kdy již elektronický čip ztrácí výkon při nastavení radiofrekvence nebo dojde k jeho mechanickému poškození (čip se oddělení od plastové konzole), elektronický čip vyměňte za nový.**

ČAS APLIKACE



Délka aplikace pleti nelze stanovit s přesností na vteřiny podle předem definovaných tabulek. Délka stimulace pleti pomocí technologií přístroje výrazně závisí na více faktorech - stavu pleti, věku uživatele, typu pleti, citlivosti pleti nebo způsobu, jakým se uživatel dlouhodobě o pleť stará. V obecné rovině platí, že by při naprosto prvním použití měla aplikace trvat řádově v jednotkách minut. Při úvodním použití lze postupně analyzovat, jakým způsobem pleť reaguje na technologii radiofrekvenčních vln nebo za jak dlouhou dobu přestane být po aplikaci citlivá na dotyk. Tím lze stanovit časový rozestup mezi jednotlivými procedurami. Délka aplikace by měla také zohlednit rozsah plochy vybrané partie. Celá plocha obličeje zabere delší čas, než například pouze koutky úst nebo stimulace vlasečnicových vrásek kolem očí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení aplikace byla aplikační hlavice očištěna. Zejména elektronický čip, který je v kontaktu s pletí. Dezinfekci provádějte ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Dezinfekční přípravek nestříkejte přímo na kontaktní plochu aplikační hlavice, ale na hadřík a poté kontaktní plochu očištěte. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost. Po použití také důkladně vypláchněte skleněnou ampulku. Bude tak připravena čistá pro další použití.

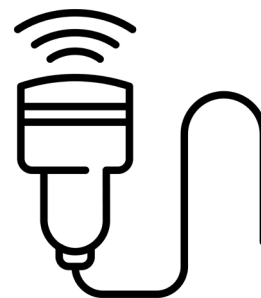

Stejně tak je třeba provádět pravidelnou údržbu celého interního systému transportu tekutiny. K čištění se používá speciální režim **PIPE CLEANING**. Odstraňte ideálně koncový aplikátor přístroje. Stiskněte tlačítko v levém horním rohu **(1)**. Naplňte ampulku destilovanou nebo kojeneckou vodou. Stiskněte tlačítko **CLEAN (2)**. Nyní probíhá proces automatického čištění. Proces nechte pracovat alespoň v délce 5 minut. Poté stiskněte tlačítko **DONE (3)**. Údržbu provádějte v pravidelných intervalech dle frekvence a četnosti použití přístroje.

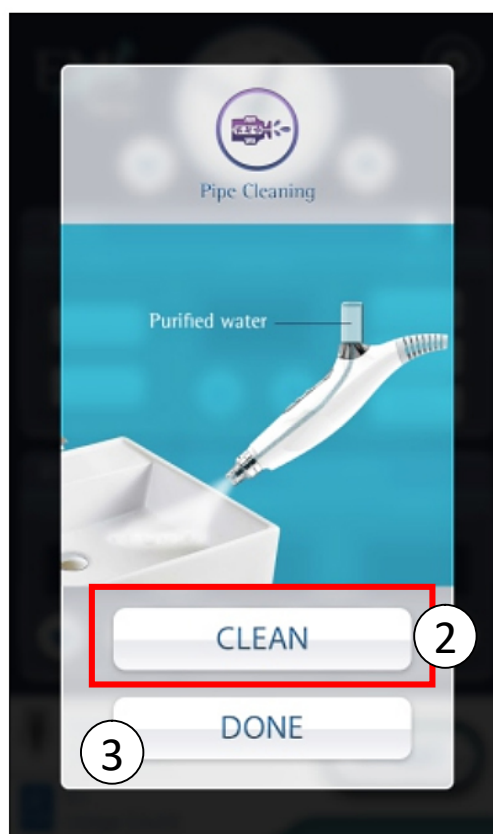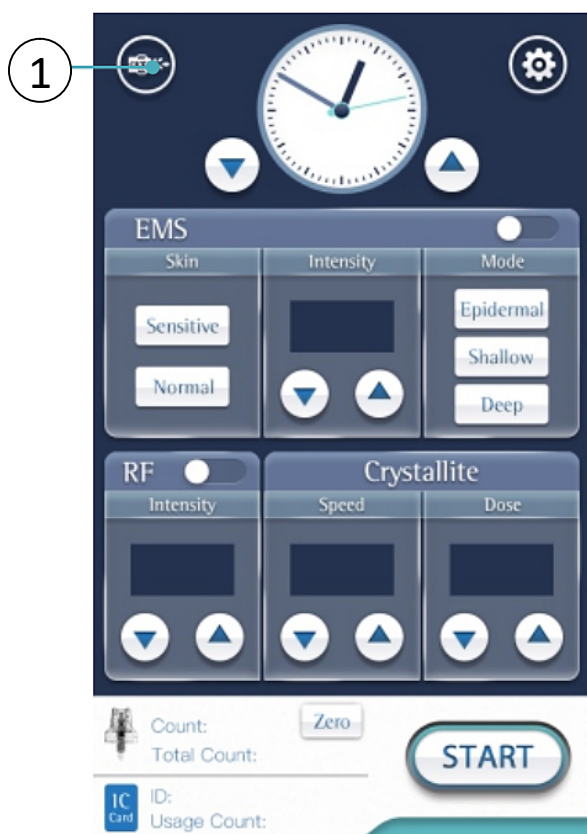

NÁSLEDNÁ PÉČE O PLEŤ PO APLIKACI

Pečovat o pleť po kosmetické aplikaci mezoterapií je důležité pro dosažení optimálních výsledků a minimalizaci rizika komplikací. Zde je několik tipů, jak pečovat o pleť po mezoterapii:

Dodržujte pokyny aplikace přístroje

Po mezoterapii vám bude odborník poskytnout pokyny ohledně péče o pleť po zákroku. Je důležité tyto pokyny dodržovat a zeptat se na jakékoliv nejasnosti.

Ochrana proti slunci

Bez ohledu na to, zda mezoterapie byla provedena na obličej, tělo nebo jinou část těla, je důležité chránit aplikovanou oblast před slunečním zářením. Používejte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření.

Nepoužívejte silné líčení

Po mezoterapii je ideální mírně omezit líčení na aplikované oblasti, aby mohla pokožka volně dýchat.

Vyhněte se horkým sprchám a saunám

Po aplikaci pleti přístrojem se vyhněte horkým sprchám, saunám a horkým koupelím, protože teplo může zvýšit otok a zpomalit hojení.

Pijte hodně vody

Udržování hydratace těla je důležité pro rychlé hojení a obnovu pokožky.

Ochrana před znečištěním

Pokuste se minimalizovat kontakt s látkami, které by mohly znečistit aplikovanou oblast, a používejte jemná čistící prostředky.

Ochrana před infekcemi

Dodržujte hygienická pravidla a vyvarujte se dotyku nečistými rukama na aplikovanou oblast.

Dodržujte plán péče o pleť

Po mezoterapii může být doporučeno používat kosmetické krémy pro hydrataci pleti. Dodržujte doporučený plán péče o pleť a používejte přípravky, které vám byly doporučeny.

Buďte trpělivi

Obnova pokožky po mezoterapii může trvat několik týdnů. Buďte trpělivi.

NÁHRADNÍ SADA KONTAKTNÍCH ČIPŮ

Vyměnitelná aplikační hlavice s RF čipem. Sada vyměnitelných RF čipů. Plastový nástavec s válečkem na aplikační hlavici. Sada je určena pro model BeautyRelax Mezomax RF Professional.

- Vyměnitelná aplikační hlavice s RF čipem 1x
- Vyměnitelný RF čip 4x
- Plastový nástavec s válečkem na aplikační hlavici 1x



Naskenuj a objednávej!

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

V jakém stavu by se měla pleť nacházet těsně před použitím přístroje?

Pokožka by měla být zbavena makeupu. Měla by být čistá. Zbavena všech povrchových nečistot. Pokud je to po technické stránce možné, doporučujeme pleť vyčistit přístrojově pomocí rotačního kartáčku nebo ultrazvukovou špachtlí. Určitě bychom doporučili vyhnout se čistění pleti pomocí metody diamantové mikrodermabraze. Mohlo by dojít k nežádoucímu podráždění pleti před aplikací radiofrekvencí.



Čím je doporučeno ampulku naplnit?

V tomto ohledu zákaznicky nesvazujeme. Při výběru sledujte množství účinných látek. Čím je větší, tím více vám jich přístroj pomůže zpracovat do pleti. Může se jednat o jakýkoliv kosmetický přípravek na tekuté bázi. Pokud je hustota větší, můžete přípravek naředit destilovanou nebo kojeneckou vodou (kohoutková voda může obsahovat nežádoucí množství vodního kamene). Konzistence by měla být taková, aby se byl přípravek schopen uvolňovat přes kontaktní elektronický čip.

Aplikační hlavice mě při kontaktu s pletí příliš hřeje. Jak to vyřešit?

Pocit tepla je průvodní jev působení radiofrekvence. Přístroj je schopen na vaši pleť skutečně aktivně působit za účelem podpořit remodelaci kolagenních a elastických vláken. Zpracovat účinné látky z kosmetického přípravku. Nejedná se o placebo efekt. Pokud je vnímáte tepla příliš vysoké i při nastavené nejnižší úrovni intenzity, nezůstávejte s aplikátorem příliš dlouho na jednom místě, ale s hlavicí se pohybujte.

Použití obdobného přístroje je pro mě něco absolutně nového. Jak mám ze začátku přistupovat k použití přístroje?

Podrobně si prostudujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Nikam nespěchejte. Začněte s aplikací pleti pomalu. Intenzitu působení radiofrekvence a EMS pulzů nastavujte vždy postupně. Pohybujte se na různých místech obličeje. Vnímejte, jak se na konkrétních místech projevuje působení tepla. Vyzkoušejte pohyb hlavice. „Vytvářejte“ na pleti čárky, kolečka. Osvojíte si tak, jaká technika pohybu je pro vaši pleť optimální. Měňte postupně tempo pohybu a rychlost. Vyzkoušejte si se zvýšenou opatrností další stupně výkonu (pokud je pro vás již dostatečná nejnižší intenzita číslo 1, výkon dále nezvyšujte). Každá část obličeje může mít navíc odlišnou citlivost pleti. Je tedy třeba nastavit pro konkrétní část obličeje specifickou úroveň působení radiofrekvence a EMS pulzů.

Z aplikátoru teče příliš velké množství přípravku najednou. Jak mohu průtok zpomalit?

Aplikační hlavice přístroje disponuje funkcí regulace uvolnění množství tekutiny z ampulky. Nelze naprosto přesně stanovit, jakou hodnotu nastavit. Pokud se zaměříte při aplikaci na jedno konkrétní místo, snižte množství přípravku na minimum. Pokud se rozhodnete aplikovat plochu obličeje v „rychlejším“ módu, množství uvolněné tekutiny můžete zvýšit. Hlavním smyslem možnosti nastavení je to, aby se přípravek uvolňoval v takovém tempu, aby postupně při pohybu aplikační hlavice pokrýval pleť, ale zároveň ve velkém množství neztékal z povrchu pryč.

Ampulka je naplněna tekutinou. Ta se ale neuvolňuje. Jak na to?

Ze začátku může chvíli trvat, než se tekutina z ampulky načerpá a uvolní přes elektronický čip na povrch pleti.

Jaké výsledky mohou očekávat? Jak se působení technologií přístroje na pleti promítne?

Následné projevy na pleti po aplikaci jsou velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. Obecně lze říci, že bezprostředně po aplikaci je pleť mírně zarudlá. Penetrací kosmetického přípravku může působit vizuálně svěžím dojmem. Na pleti, kde došlo ke stimulaci pomocí aplikační hlavice, dochází k okamžitému lokálnímu zvýšení teploty. Přesto je však třeba dát pleti prostor v řádu hodin, kdy dojde k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za míru pružnosti pleti. Neinvazivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces. Je třeba plet průběžně takto stimulovat (v průměru 2x až 4x do měsíce). Při ukončení pravidelné aplikace pleti se pleť opět postupně vrací do původního stavu. Minimální rozestup mezi aplikací stejné partie doporučujeme 5 až 7 dní.

Jakým způsobem je možné působení radiofrekvence vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pletí proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis proud radiofrekvenčních vln. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přímé zacílení na vrstvu dermis o specifické frekvenci a výkonu. Působení radiofrekvenčních vln je navíc důležitým faktorem pro úspěšnost zpracování účinných látek z kosmetického přípravku.

U přístroje uvádíte možnost komerčního nebo domácího použití. Nevylučují se tyto dva aspekty použití navzájem?

Pro kterýkoliv přístroj neinvazivního charakteru aplikace těla představuje základní hledisko jeho kvality konkrétní technologie a zejména možný rozsah nastavení výkonu. Profesionalitu/užitnou hodnotu přístroje je vhodné posuzovat zejména podle toho, jakým způsobem a s jakou efektivitou lze docílit požadovaných výsledků. Druhým aspektem je životnost přístroje. Při komerčním používání je frekvence použití násobně vyšší ve srovnání s používáním pouze jednou osobou. Nároky na životnost a konstrukci přístroje jsou v tomto ohledu mnohem přísnější. Z tohoto pohledu vyhovuje model BEAUTYRELAX MEZOMAX RF PROFESSIONAL oběma vlastnostem - velmi účinná technologie a kvalitní komponenty zajišťující dlouhou životnost při vysoké frekvenci provozu. Z tohoto pohledu lze přístroj považovat za univerzální nástroj pro domácí i komerční využití. S ohledem na konstrukci a složení funkcí použijí přístroj primárně kosmetická studia pro komerční provoz.

Jaký je důvod péče o aplikační hlavici po každém použití?

Kontaktní hlavici je třeba pečlivě očistit. V případě, kdy je přístroj používán více osobami, je třeba dezinfikovat hlavici po každém jednotlivém použití. Ideálně pomocí spreje na bázi alkoholu. Zabráníte tak možnosti šíření bakterií a zajistíte maximální hygienu provozu. Aplikační hlavici nezapomeňte důkladně vysušit pomocí hadříku.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních přístrojů. Přístroj neléčí žádné kožní onemocnění. Přístroj nabízí ověřenou technologii radiofrekvence a EMS. Přístroj při dodržení všech pokynů použití přístroje významným způsobem přispívá ke zlepšení kondice unavené a nezdravě vyhlížející pleti.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Je přístroj vodotěsný?

Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod proudem tekoucí vody. Samotné skleněné ampulky můžete po odpojení od aplikační hlavice propláchnout pod proudem teplé vody.

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma SANTADRIA s.r.o. IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454 tímto výslovně prohlašuje, že nenese odpovědnost za jakékoliv jednání, způsob, použití či aplikaci produktu ze strany zákazníka. Zákazník je plně odpovědný za veškeré následky vyplývající z užívání produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za právní důsledky způsobené tím, že by produkt mohl být v rozporu s platnou legislativou, obzvláště s legislativou týkající se podmínek pro používání přístrojů obdobného typu s ohledem na komerční použití přístroje zákazníkem. Jakákoliv povinnost zjišťovat splnění právních předpisů je na straně zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že je jeho výhradním úkolem zajistit, aby použití produktu bylo v souladu se zákony, předpisy a normami aplikovatelnými v konkrétní jurisdikci. Tento text představuje úplnou a konečnou dohodu o vyloučení odpovědnosti prodávajícího za aplikační účely produktu a nahrazuje jakoukoliv předchozí ústní či písemnou komunikaci týkající se odpovědnosti za produkt.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz



737 196 160

mh@santadria.cz

shop.beautyrelax.cz

www.beautyrelax.cz

facebook.com/BeautyRelaxEquipment



Martin Hrbek
odborný konzultant

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

SANTADRIA s.r.o. Mojmírovo nám. 75/2 Brno 61200 Brno 61200 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

BeautyRelax Mezomax RF Professional

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2956**

EAN 8594166122352

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015 EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010

EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014

EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-11:2004

Přístroj není zdravotnický prostředek.

Teplota radiofrekvence 42°C. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění.

Nenarušuje integritu pleti.

Při komerčním provozu je třeba dbát na hygienu provozu.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:
Datum vydání:

Brno
15.4.2022

.....
Martin Hrbek, jednatel