

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-2824

MULTICARE STUDIO



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
SLOVO ÚVODEM	5
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	6
UPOZORNĚNÍ	8
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	9
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE	10
HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE	10
POUŽITÍ SONOGELU	10
TECHNICKÉ PARAMETRY	11
OBSAH BALENÍ	11
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	12
METODY REDUKCE VRÁSEK	12
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	13
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC	14
POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY PŘÍSTROJE	15
INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁK	18
INSTALACE PŘÍSTROJE - VÝMĚNA POJISTKY	18
INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA	19
POPIS DISPLEJE	20
POPIS OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK	21
RADIOFREKVENCE	22
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	23
GALVANICKÝ PROUD	26
ELEKTROFORÉZA	27
NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU	28
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ELEKTROFORÉZY	29
TEPELNÁ TERAPIE - PŮSOBENÍ CHLADU	31
DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRAZE	32
ÚČINKY PŮSOBENÍ ABRAZE PLETI	37

OBSAH:

ABRAZIVNÍ KORUNKY	38
FILTRAČNÍ VATOVÉ TAMPÓNKY	39
VZDUCHOVÉ HADICE A VZDUCHOVÝ FILTR	39
INSTALACE APLIKÁTORU DERMABRAZE	40
INSTALACE FILTRAČNÍHO TAMPÓNKU	41
VOLBA ABRAZIVNÍ KORUNKY	42
NASTAVENÍ VÝKONU NASÁVÁNÍ	43
NEŽ ZAČNETE MIKRODERMABRAZI POUŽÍVAT	44
DOPORUČENÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	44
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ	45
HYDRATACE PLETI	46
INSTALACE HYDRATAČNÍ PISTOLE	47
OVLÁDÁNÍ HYDRATAČNÍ PISTOLE	48
POUŽITÍ HYDRATAČNÍ PISTOLE	48
DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY	49
NEVHODNÉ PŘÍPRAVKY (RIZIKO UCPÁNÍ!)	50
CO DĚLAT, KDYŽ SE ZÁSOBNÍK UCPE?	50
METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU	51
MAPA CITLIVOSTI PLETI	54
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	55
ČASOVÝ ROZSAH PRÁCE S HLAVICEMI	56
ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU	58
ŽIVOTNOST A OPOTŘEBENÍ APLIKAČNÍCH HLAVIC	59
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	59
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	60
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	63
CERTIFIKACE	63
EU DISTRIBUTOR	63
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	64

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – Špičková technologie krásy pro domácí i profesionální použití

Vítejte ve světě profesionální estetiky v pohodlí domova! BeautyRelax je ryze česká značka, která od roku 2010 přináší inovativní přístroje pro péči o pleť, tělo a vlasy. Naše zařízení kombinují nejmodernější technologie s jednoduchým ovládáním, takže si můžete dopřát salonní péči bez nutnosti návštěvy kosmetického studia.



Proč si vybrat BeautyRelax?

Vysoká účinnost – Používáme stejné technologie jako profesionální salony (radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud).

Univerzální použití – Vhodné pro domácí i komerční využití.

Odborné poradenství – Pomůžeme vám vybrat ideální přístroj na míru vašim potřebám.

Nadstandardní služby – Rychlé doručení, záruční a pozáruční servis.

Naše kategorie přístrojů

Kosmetické přístroje – Pro dokonalou pleť bez vrásek, akné nebo pigmentace.

Přístroje na formování postavy – Redukce celulitidy, lifting a modelace kontur.

Masážní technologie – Lymfatické masáže, relaxace a regenerace svalů.

IPL depilace – Trvalé odstranění chloupků šetrnou cestou.

Špičková péče moderními technologiemi

Díky pokrokům v estetických technologiích si nyní můžete dopřát účinná aplikace bez bolestivých zákroků a dlouhého čekání. Ať už řešíte:

- Vrásky, povadlou pleť nebo nedostatek elasticity
- Celulitidu, ochablé kontury nebo otoky
- Nechtěné chloupky nebo problematickou pokožku

S BeautyRelax dosáhnete viditelných výsledků šetrně, bezpečně a bez nepříjemných pocitů.

Vize zakladatele

„Od začátku naší cesty je naší prioritou zpřístupnit špičkové estetické technologie každému. Ať už hledáte přístroj pro osobní péči, nebo profesionální studio, nabízíme řešení s vysokou užitnou hodnotou, dlouhou životností a rychlou návratností investice.“

Martin Hrbek, zakladatel a odborný konzultant BeautyRelax

Ušetřete čas i peníze

Pravidelným používáním přístrojů BeautyRelax můžete výrazně snížit náklady na kosmetické procedury a zároveň mít svou péči plně pod kontrolou.

- Výsledky bez bolesti a zbytečného stresu
- Šetrná neinvazivní řešení pro všechny typy pleti
- Vybírejte z desítek modelů pro různé potřeby

Objevte kouzlo moderní estetiky a vyberte si svůj ideální přístroj v naší kompletní nabídce. Těšíme se, že s námi budete sdílet vášně pro krásu a inovace!



(+420) 737 196 160
mh@santadria.cz
shop.beautyrelax.cz
www.beautyrelax.cz
facebook.com/BeautyRelaxEquipment

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

MARTIN HRBEK odborný konzultant a školitel
SANTADRIA s.r.o. Mojžírovo nám. 75/2 Brno 62100 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu **BeautyRelax**. Velmi si vážíme toho, že jste si zvolili právě náš estetický přístroj. Před prvním použitím vás důrazně žádáme, abyste si **pečlivě prostudovali všechny informace uvedené v tomto návodu k obsluze**, a to zejména kapitoly věnované **výstrahám a bezpečnostním upozorněním**. Přístroj používejte výhradně v souladu s uvedenými pokyny. Dodržováním těchto zásad přispějete k **maximálnímu využití všech funkcí přístroje**, k dosažení optimálních výsledků a především k ochraně svého zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám snažíme co nejpřehledněji a srozumitelně přiblížit **používané technologie**, jejich princip fungování a doporučený způsob použití. Veškeré uvedené instrukce prosíme nepodceňujte ani neberte na lehkou váhu. Estetický přístroj **BeautyRelax** pracuje s moderními technologiemi určenými pro **bezbolestnou a bezpečnou pleťovou aplikaci**. Přístroj prošel dlouhým vývojem a splňuje veškeré **zákonem stanovené bezpečnostní normy**. Pro dosažení vysoké efektivity aplikace pracuje přístroj s odpovídajícím výkonem, přičemž jeho konstrukce, vlastnosti a technologie byly navrženy s důrazem na **maximální bezpečnost a uživatelskou přívětivost**.

Důležité úvodní informace k přístroji a jeho používání

- Estetický přístroj **BeautyRelax** spadá do kategorie **estetických a masážních přístrojů**. **Nejedná se o zdravotnický prostředek** a není určen k léčbě jakýchkoliv kožních onemocnění. Nabízí ověřené technologie, které při správném použití napomáhají **výraznému zlepšení kondice a vzhledu pleti** pomocí různých aplikačních metod. Konstrukce přístroje je navržena tak, aby zvládla i **náročný komerční provoz s vysokou frekvencí používání**.
- Přístroj poskytuje **neinvazivní aplikace**, což znamená, že žádná část aplikačních hlavic **fyzicky neproniká pod povrch kůže**.
- Neinvazivní charakter aplikace je základním předpokladem pro šetrné působení na pleť. Z hlediska odbornosti obsluhy a provozu přístroje je však vždy nutné **respektovat aktuálně platnou legislativu v dané zemi**, která může pro jednotlivé technologie stanovovat specifická pravidla. Provoz kosmetického studia je nutné těmto předpisům přizpůsobit.
- Estetický přístroj **BeautyRelax** je **certifikován** a splňuje všechny normy kladené na přístroje tohoto typu. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických i konstrukčních součástí.
- Každá technologie, kterou přístroj nabízí, umožňuje **individuální nastavení intenzity**. Pokud přístroj používáte v komerčním provozu, doporučujeme nejprve **vyzkoušet účinky jednotlivých aplikačních hlavic na vlastní pokožce**, abyste získali reálnou představu o působení technologie při různých úrovních výkonu.
- Při používání aplikačních hlavic **není nutné nastavovat maximální výkon**. Intenzitu vždy přizpůsobujte tak, aby byla aplikace na pleti znatelná, ale **nikdy nepřekračovala práh bolesti či výrazného diskomfortu**.
- Neplatí pravidlo, že častější používání přístroje vede k rychlejším výsledkům. Dopřejte tělu a pokožce **dostatek času na regeneraci a zpracování energie**, která je při aplikaci uvolněna. Tím významně přispějete k ochraně svého zdraví i k lepším dlouhodobým výsledkům. Po každé aplikaci doporučujeme pleť **dostatečně hydratovat vhodnými kosmetickými přípravky**, čímž podpoříte její regeneraci.
- V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů nebo pochybností během používání přístroje se na nás neváhejte obrátit.

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Multicare Studio je profesionální estetický přístroj určený pro kosmetické aplikace pleti na vysoké kvalitativní úrovni v rámci komerčního provozu. Přístroj **není zdravotnickým prostředkem** a není určen k diagnostice ani léčbě jakýchkoliv kožních či zdravotních onemocnění.



Přístroj neposkytuje prostřednictvím aplikačních hlavic žádnou technologii, která by **narušovala integritu pokožky**. Nepoužívá jehly ani jiné invazivní prvky a žádná část aplikačních hlavic **neproniká pod povrch pleti**. Veškeré aplikace jsou **neinvazivní a šetrné**.

BeautyRelax Multicare Studio byl vyvinut pro poskytování základních a rozšířených kosmetických procedur, zejména:

- hloubkové čištění pleti
- hydrataci a výživu pleti
- zapracování kosmetických přípravků
- podporu zlepšení celkové kondice pleti
- zklidnění a regeneraci pokožky

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Přístroj využívá kombinaci moderních estetických technologií, mezi které patří:

- ultrazvuk
- radiofrekvence
- jemné EMS pulzy, atp.

Legislativa a odpovědnost provozovatele

Rozsah oprávnění k používání jednotlivých technologií pro **komerční účely** je v každé zemi Evropské unie stanoven **platnou legislativou**. Ta definuje požadovanou úroveň odborné způsobilosti, vzdělání nebo licence potřebné k provozování přístrojů obdobného typu a k aplikaci konkrétních technologií.

Provozovatel je povinen se s těmito právními předpisy seznámit a **dodržovat je v plném rozsahu**. V rámci komerčního provozu smí využívat pouze ty funkce a technologie přístroje, ke kterým má **oprávnění dle aktuálně platných zákonů, vyhlášek a profesních předpisů**.

Odpovědnost distributora

Distributor a prodejce **SANTADRIA s.r.o.** nenese žádnou odpovědnost za používání přístroje v rozporu s platnou legislativou země, ve které je přístroj provozován. Stejně tak nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku:

- nedodržení právních předpisů,
- použití přístroje bez odpovídající odborné způsobilosti,
- používání přístroje v rozporu s pokyny a podmínkami uvedenými v tomto návodu k obsluze.

UPOZORNĚNÍ



- Před prvním uvedením přístroje do provozu si **pečlivě prostudujte tento návod k obsluze**, včetně všech vyobrazení. Návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Instalaci a uvedení přístroje do provozu provádějte výhradně v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Pokud je vaše pokožka postižena **závažným kožním onemocněním**, přístroj nepoužívejte. V případě pochybností o vhodnosti používání přístroje konzultujte svůj zdravotní stav s praktickým lékařem nebo dermatologem.
- Používá-li přístroj více osob, je nutné dbát na **zvýšené hygienické nároky**. Po každém použití je třeba aplikační hlavice **důkladně dezinfikovat přípravkem na bázi alkoholu**.
- Pokud je přístroj **poškozený, nefunguje správně nebo spadl do vody**, nikdy jej neuvádějte do provozu.
- V případě mechanického poškození se **nedotýkejte vnitřních částí přístroje**, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj spadne na zem, může dojít k jeho skrytému poškození. V takovém případě přístroj **dále nepoužívejte** a kontaktujte autorizované servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí (např. koupelna, sprcha, bazén).
- Přístroj **není vodotěsný ani omyvatelný**. Žádná jeho část nesmí být ponořena do vody ani vystavena proudu tekoucí vody.
- Přístroj během provozu **nenechávejte bez dozoru**. Po každém použití jej vždy řádně vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do teplého prostředí, vyčkejte před jeho zapnutím **minimálně 3 hodiny**, aby se předešlo kondenzaci vlhkosti.
- Přístroj není určen k používání dětmi ani osobami, jejichž **fyzické nebo duševní schopnosti neumožňují bezpečné používání** bez dozoru odpovědné osoby.
- Přístroj **neumísťujte ani nepoužívejte na horkých nebo tepelných zdrojích** (radiátory, kamna, otevřený oheň apod.).
- Nepokoušejte se přístroj **rozebírat, upravovat ani opravovat svépomocí**. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Přístroj skladujte v **suchém a čistém prostředí**, chraňte jej před prachem a nečistotami.
- Během používání přístroj **nijak nezakrývejte**, zejména ne ventilační otvory, aby nedošlo k přehřátí.
- Přístroj nevystavujte **přímému slunečnímu záření** ani extrémním teplotám.
- Distributor nenes odpovědnost za škody vzniklé **nesprávným používáním přístroje v rozporu s tímto návodem** ani za následky vyplývající z nedodržení bezpečnostních pokynů.
- Za škody na zdraví nebo majetku způsobené **jiným než určeným způsobem používání** přístroje nenes distributor odpovědnost.

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT



Použití přístroje **BeautyRelax** není vhodné nebo je **zakázáno** v následujících případech:

Zdravotní omezení

- Těhotenství a období kojení
- Kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické přístroje
- Kovové implantáty v oblasti obličeje, krku nebo dekoltu (šrouby, destičky, výplně, zubní implantáty v blízkosti aplikované oblasti)
- Epilepsie
- Onkologické onemocnění (aktivní nebo v léčbě)
- Závažná onemocnění srdce a cév
- Poruchy krevní srážlivosti
- Autoimunitní onemocnění v aktivní fázi
- Horečnaté a infekční stavy
- Neurologická onemocnění spojená se sníženou citlivostí pokožky

Kožní omezení

- Otevřené rány, čerstvé jizvy, popáleniny
- Akutní záněty kůže, ekzém, lupénka v aktivní fázi
- Silné akné, hnisavé nebo zanícené projevy
- Infekční kožní onemocnění (bakteriální, virové, plísňové)
- Aktivní opar (herpes)
- Silné podráždění, alergická reakce nebo spálená pokožka
- Po čerstvých estetických zákrocích
(botox, výplně, chemický peeling, laser, mezoterapie – minimálně 2–4 týdny dle typu zákroku)

Další omezení použití

- Nepoužívat na očích, na očních víčkách, štítné žlázy a genitálií
- Nepoužívat při snížené schopnosti vnímat teplo nebo bolest
- Nepoužívat na poraněnou pokožku
- Nepoužívat pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

Důležité upozornění

V případě jakýchkoliv pochybností, chronického onemocnění nebo dlouhodobé léčby doporučujeme konzultaci s lékařem před použitím přístroje. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické použití a nenahrazuje lékařskou péči.

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE

- Obličej
- Krk
- Dekolt

HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE

- Zvýšení pružnosti pleti.
- Zvýraznění kontur obličeje.
- Vyhlazení výrazných hlubokých vrásek.
- Maximální výživa pleti.
- Okamžitá hydratace pleti.
- Odstranění odumřelých kožních buněk a reziduí.
- Odstranění velice drobných částecek makeupu, které ulpí v kožních pórech.
- Hlubokový peeling pleti.
- Uvolnění kožních pórů.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Mechanická masáž pokožky.

POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Aplikační hlavici technologie **RF**, **EL**, **BIO** nepoužívejte na suchou pokožku.



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Technologie: Radiofrekvence, galvanický proud, neinvazivní mezoterapie, diamantová mikrodermabrazie, hydratační pistole, působení chladu.
- Výkon: 65W.
- Radiofrekvence: 1MHz, teplota max. 40°C.
- Hlavičky s působením chladu: 5°C až 10°C.
- Rozsah nastavení podtlaku: 0 až 250kpa.
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V.
- Rozměry hlavní jednotky: 29x29x12cm.
- Hmotnost: 7kg.

OBSAH BALENÍ

- Hlavní jednotka 1x
- Abrazivní korunky na diamantovou mikrodermabrazii 9x
- Aplikační hlavičky s radiofrekvencí 1x
- Aplikační hlavičky s galvanickým proudem 1x
- Aplikační hlavičky s neinvazivní mezoterapií 1x
- Vodicí hlavičky do ruky pro aplikovanou osobu 2x
- Aplikační hlavičky s diamantovou mikrodermabrazí 1x
- Aplikační hlavičky s tepelnou terapií - působení chladu 1x
- Vzduchové hadice 2x
- Vzduchové filtry 2x
- Hydratační pistole 1x
- Sada filtračních tampónků 1x
- Sonogel 1x
- Návod k obsluze 1x
- Napájecí kabel 220V 1x

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojová aplikace pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vláken. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

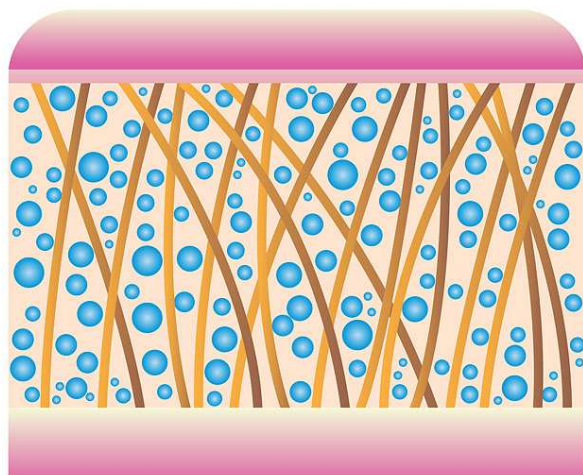

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

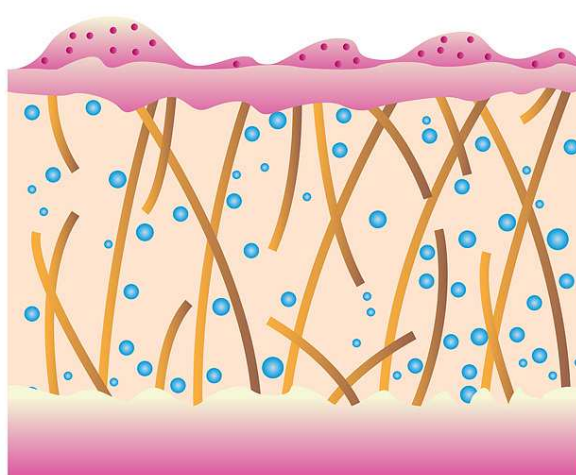


POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Multicare Studio je profesionální estetický přístroj určený pro špičkové pleťové aplikace na nejvyšší úrovni. Nabízí kompletní spektrum klíčových technologií pro komplexní péči o pleť – od hloubkového čištění, zapracování kosmetických přípravků a intenzivní hydratace až po lifting a zklidnění pleti. Jediný přístroj efektivně nahrazuje až 6 samostatných zařízení, čímž výrazně šetří prostor i náklady. Použití aplikačních hlavice je velmi příjemné, zcela bezpečné a bez nepříjemných pocitů, přičemž zajišťuje maximální účinnost každého aplikace. Přístroj vyniká precizním zpracováním všech komponentů a mimořádně dlouhou životností aplikačních hlavice, což jej činí ideální volbou pro komerční provoz s vysokou frekvencí použití. Díky vysoké užitné hodnotě nabízí rychlou návratnost počáteční investice. BeautyRelax Multicare Studio je vhodný pro všechny typy pleti a garantuje profesionální kosmetickou péči bez kompromisů.

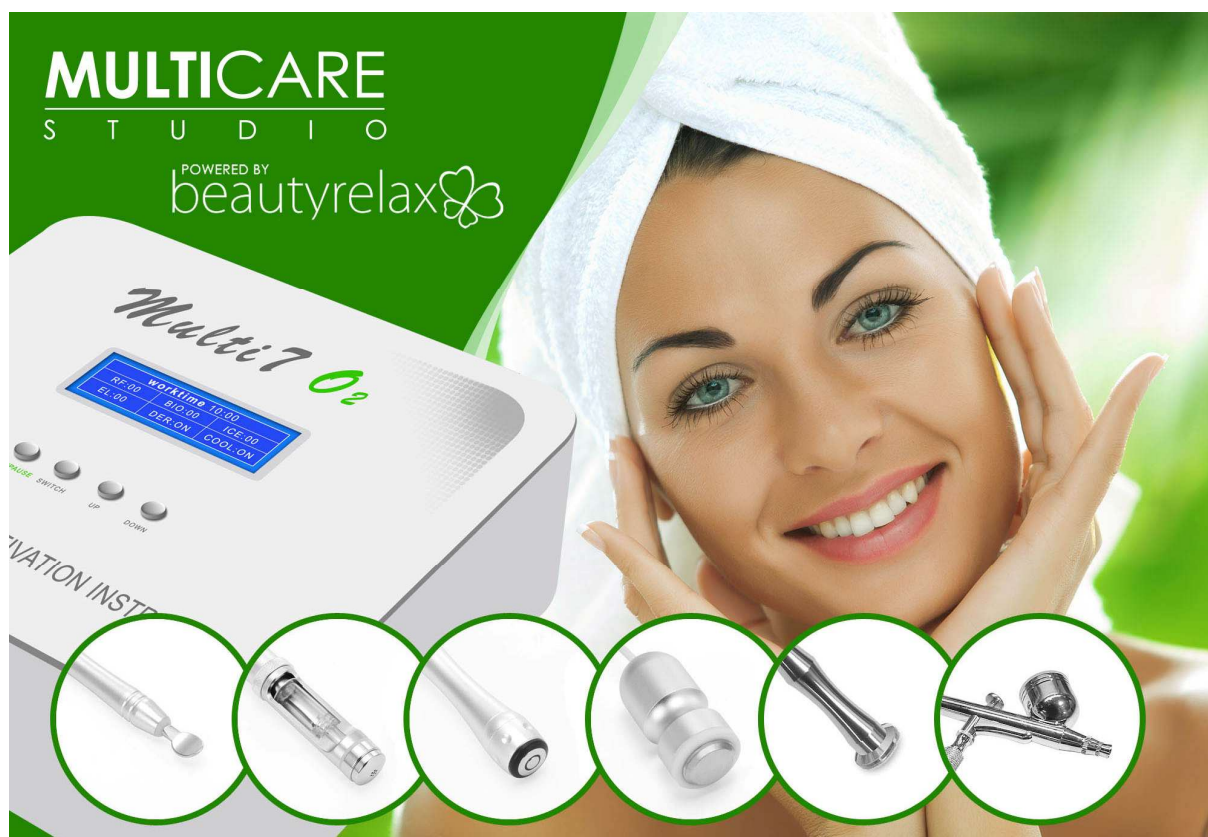

POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC

1. Radiofrekvence
2. Galvanický proud
3. Elektroforéza
4. Tepelná terapie - chlad
5. Diamantová mikrodermabráze
6. Hydratace pleti
7. Kontaktní hlavice pro uzavření okruhu mezi přístrojem a uživatelem



POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY PŘÍSTROJE

Na boční straně přístroje jsou umístěny zdířky pro připojení aplikačních hlavic. Při zapojení hlavic postupujte následovně:


1. Konektor kontaktní hlavice pro uzavření okruhu mezi přístrojem a uživatelem pro správnou funkci **galvanického proudu**
2. Konektor aplikační hlavice s funkcí **galvanického proudu**
3. Konektor kontaktní hlavice pro uzavření okruhu mezi přístrojem a uživatelem pro správnou funkci **elektroforézy**
4. Konektor aplikační hlavice s funkcí **elektroforézy**

Poznámka: Součástí balení jsou dva kusy kontaktních hlavic pro uzavření okruhu mezi přístrojem a uživatelem. Obě dvě kontaktní hlavice jsou naprosto totožné. Nezáleží tedy na pořadí jejich zapojení.

Věnujte zvýšenou pozornost: Galvanický proud a elektroforéza jsou technologie, které vyžadují uzavření vodivého okruhu mezi přístrojem a uživatelem. Aby technologie fungovaly správně, je třeba, aby uživatel držel v pravé nebo levé ruce příslušnou kontaktní hlavici. Jde o technologické řešení, které umožňuje správné působení na pleť těchto dvou technologií. Po zapojení všech aplikačních hlavic je třeba vždy držet příslušnou kontaktní hlavici.

Sada aplikátorů určených pro funkci působení galvanického proudu

Sada aplikátorů určených pro funkci působení elektroforézy

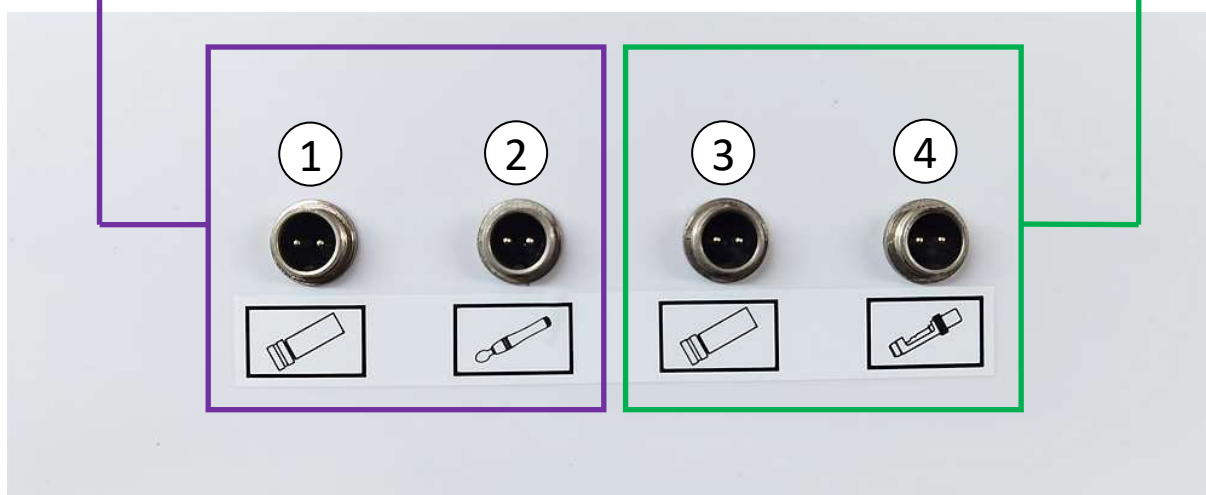


Upozornění: Konektory aplikačních hlavic jsou vybaveny speciálním kovovým prstencem. Po obvodu zdířek vede prstenec se závitem. Po připojení do zdířky je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky. Provádějte pravidelnou průběžnou kontrolu, že jsou prstence dotaženy nadoraz.

POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY PŘÍSTROJE

Na boční straně přístroje jsou umístěny zdířky pro připojení aplikačních hlavice a další konstrukční prvky pro správnou funkčnost přístroje. Při zapojení hlavice postupujte následovně:

1. Konektor apliační hlavice s funkcí **působení chladu**
2. Konektor pro vzduchovou hadici spojenou s **hydratační pistolí**
3. Konektor pro vzduchovou hadici spojenou s aplikační hlavici na **diamantovou mikrodermabrazí**
4. Otočné kolečko pro plynulé ruční **dávkování tlaku vzduchového čerpadla**
5. Konektor apliační hlavice s funkcí **radiofrekvence**

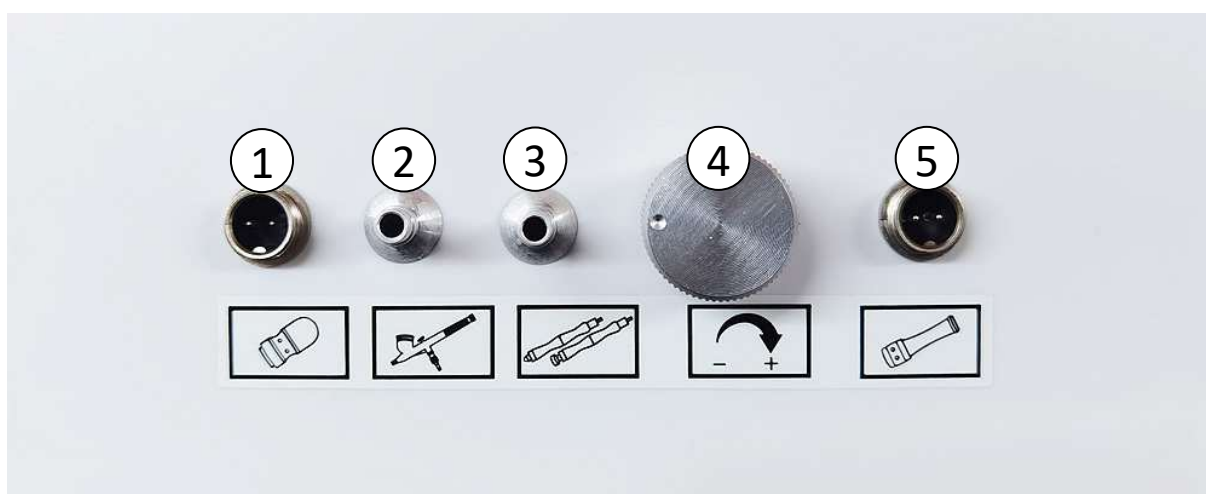


Věnujte zvýšenou pozornost: Pravidelně kontrolujte připojení vzduchových hadic pro hydratační pistoli a aplikační hlavici s diamantovou mikrodermabrazí. Vzduchová hadice musí být vždy připojena na kovový konektor nadoraz.

Poznámka: Otočné kolečko pro dávkování tlaku proudění vzduchu. Používá se při funkci hydratační pistole a diamantové mikrodermabrazie. Vždy začínejte na nejnižší úrovni a přidávejte na výkonu postupně. Otočením po směru hodinových ručiček přidáte na výkonu. Otočením proti směru hodinových ručiček uberete na výkonu.

Upozornění: Konektory (1) a (5) jsou vybaveny speciálním kovovým prstencem. Po obvodu zdířek vede prstenec se závitem. Po připojení do zdířky je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky. Provádějte pravidelnou průběžnou kontrolu, že jsou prstence dotaženy nadoraz.

POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY PŘÍSTROJE

1. *Hlavní spínací tlačítko ON/OFF (1/0)*
2. *Umístění pojistky*
3. *Vstup pro napájecí kabel*
4. *Šroubky pro upevnění držáku na hlavice a abrazivní korunky*

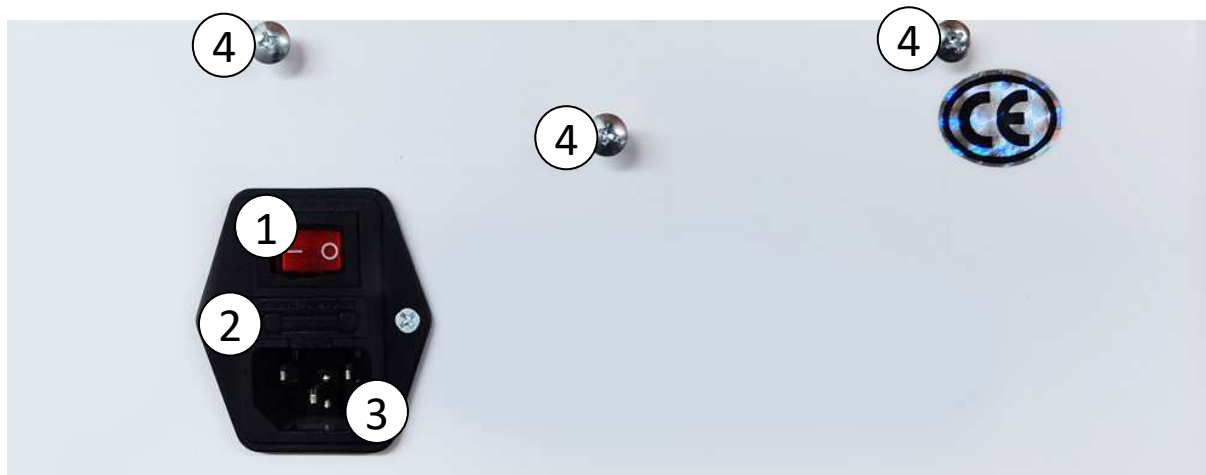

INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁK

Součástí balení je průhledný držák. Slouží pro uchycení aplikačních hlavíc. Držák připevněte jednoduše k hlavní jednotce pomocí šroubků, které jsou v závitech již umístěny. Šroubky odšroubujte, přiložte držák a zpět zašroubujte. Použijte křížový šroubovák. **Šroubky neutahujte příliš velkou silou. Mohlo by dojít k prasknutí plastového držáku.** Může se stát, že bude třeba šroubky po nějakém čase znovu dotáhnout. **Hlavní jednotku přístroje umístěte vždy na rovnou plochu. Výdechy ventilátoru na bočních stranách přístroje nesmí být nikdy mechanicky zakryty. Mohlo by dojít k přehřátí přístroje!**



INSTALACE PŘÍSTROJE - VÝMĚNA POJISTKY


Přístroj je vybaven pojistkou. Slouží jako ochrana přístroje v případech, kdy by ve vaší elektrické síti došlo k přepětí nebo jiné technické závadě. Pojistka zabrání působení elektrického přepětí, což by vedlo k fatálnímu poškození přístroje. Pojistku je v tomto případě nezbytné vyměnit za novou. Pokud je přístroj připojen k napájecímu kabelu, ale přesto nefunguje, vždy zkontrolujte pojistku a případně ji vyměňte za novou. Pokud budete potřebovat nové náhradní pojistky, kontaktujte prosím prodejce/distributora.

INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Všechny části přístroje zbavte obalového materiálu.
2. Hlavní jednotku umístěte na rovnou, suchou a plochu. Vždy dbejte na to, aby nebyly zakryty mřížky ventilátoru na spodní straně hlavní jednotky. Doporučujeme vybrat takové místo, které je blízko elektrické zásuvky.
3. Hlavní jednotku přístroje připojte k napájecímu adaptéru. Jeden konec připojte do zdířky na zadní straně přístroje. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické sítě 220V.
4. K hlavní jednotce instalujte plastový držák. Připojte všechny aplikační hlavice, kontaktní hlavice a vzduchové kabely.
5. Pokud se rozhodnete vyměnit aplikační hlavici, přístroj musí být vždy vypnutý.
6. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF na zadní straně hlavní jednotky do polohy 1. Zapnutí přístroje doprovází spuštění ventilátoru a zapnutí displeje. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.
7. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka ON/OFF na zadní straně hlavní jednotky do polohy 0.

*Konektory aplikačních hlavic mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky na zadní straně přístroje je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. **Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.***

**Utažení
prstence
zašroubováním**

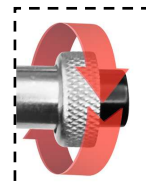

POPIS DISPLEJE

Displej je rozdělen na 7 částí. Každá část zobrazuje konkrétní údaj. Displej je díky podsvícení velmi dobře čitelný. Při použití přístroje vždy pracujete s tímto jedním rozvržením informací na displeji. Použití přístroje je tak velmi snadné. Máte stále přehled, které technologie jsou aktivní a jaká je nastavena úroveň výkonu.


- 1. WORKTIME** - čas v minutách, po který je daná funkce přístroje aktivní
- 2. RF** - radiofrekvence. Možnost nastavení výkonu v rozsahu od 1 do 10.
- 3. EL** - elektroforéza. Možnost nastavení výkonu v rozsahu od 1 do 10.
- 4. BIO** - galvanický proud. Možnost nastavení výkonu v rozsahu od 1 do 10.
- 5. DER** - diamantová mikrodermabrazie (ON/OFF = ZAPNUTO/VYPNUTO).
- 6. ICE** - působení chladu. Možnost nastavení výkonu v rozsahu od 1 do 10.
- 7. OXI** - hydratace pleti (ON/OFF = ZAPNUTO/VYPNUTO).



Poznámka: Pokud je u funkcí RF, EL, BIO, a ICE nastavena 0, je daná funkce vypnuta. Všechny funkce můžete v průběhu použití přístroje libovolně měnit.

POPIS OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

1. **START/PAUSE** - spuštění a zastavení činnosti dané funkce
2. **SWITCH** - přepnutí mezi jednotlivými programy
3. **UP** - zvýšení hodnoty výkonu
4. **DOWN** - snížení hodnoty výkonu

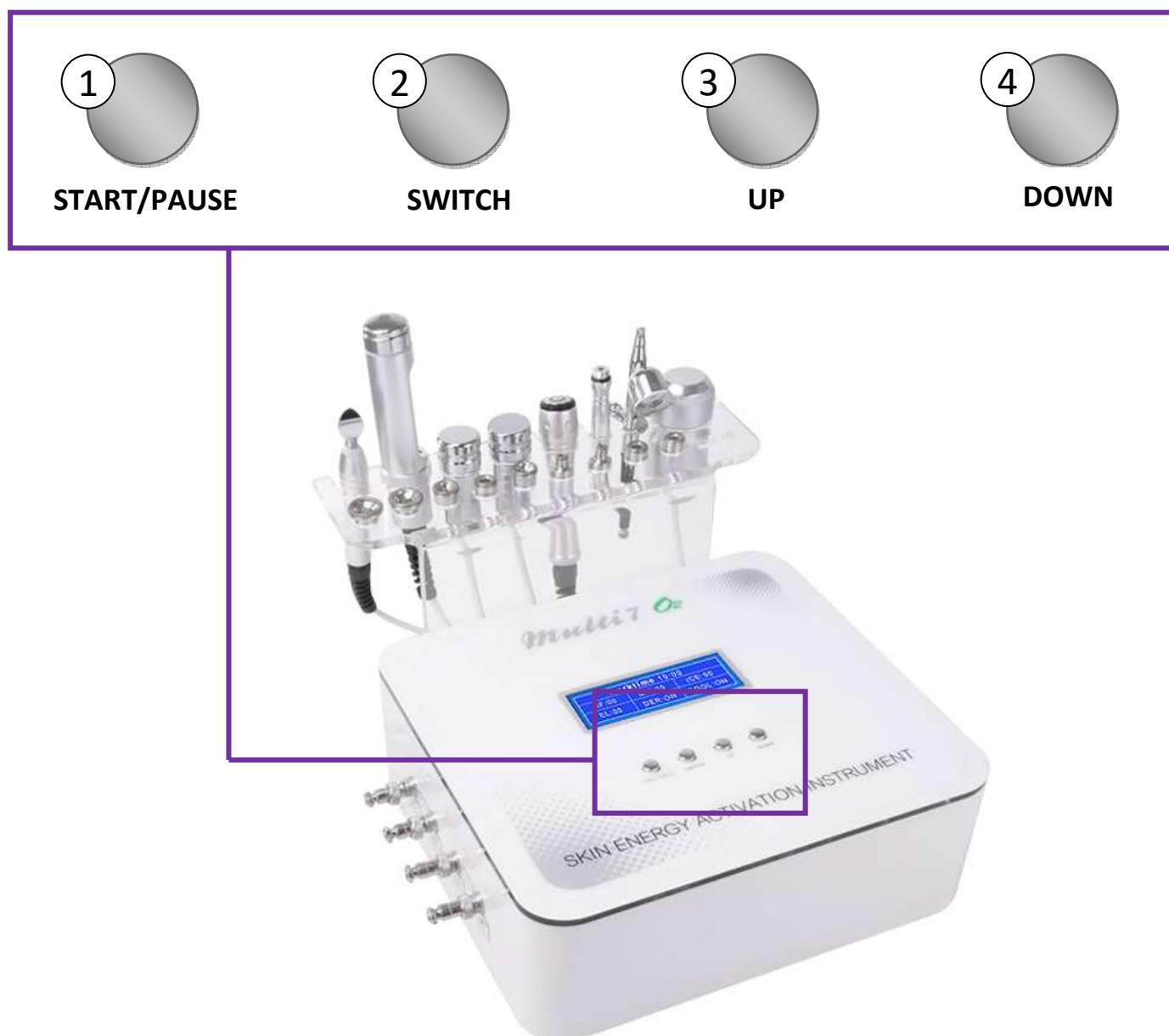

RADIOFREKVENCE



Radiofrekvence patří v oblasti estetické péče k nejučinnějším metodám neinvazivního liftingu pleti. Speciální aplikační hlavice přenáší do pokožky radiofrekvenční vlny o přesně definované frekvenci, které jsou optimalizovány pro cílené působení v hlubších vrstvách pleti.

Radiofrekvenční energie vytváří kontrolovaný tepelný gradient, jenž významně ovlivňuje biologické procesy ve vrstvě dermis. Dochází k aktivaci remodelace kolagenových a elastinových vláken a současně k podpoře přirozené tvorby vlastního kolagenu, což vede k postupnému zpevnění a vypnutí pleti.

Během aplikace je na pleti vnímáno příjemné, rovnoměrné teplo, které potvrzuje správné působení energie. Díky maximálně přesnému zacílení radiofrekvenční energie je možné efektivně ošetřit i oblasti s výraznější tukovou vrstvou. Následná aktivace metabolických procesů přispívá k výraznému vyhlazení povislých partií a korekci deformovaných kontur obličeje i těla.

Aplikace je mimořádně účinná zejména pro zralou pleť s výskytem viditelných a hlubších vrásek. Přístroj umožňuje plynulé nastavení výkonu, což zajišťuje bezpečnou a komfortní aplikaci i u pleti s rozdílnou mírou citlivosti.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

APLIKACE SONOGELU

Pokud se rozhodnete ošetřovat větší oblasti obličeje, krku nebo dekoltu, doporučujeme nanášet sonogel postupně po menších částech. I když má kontaktní gel vynikající hydratační vlastnosti, při delším působení na vzduchu může postupně vysychat a snižovat kvalitu kontaktu s pletí.

SPRÁVNÝ KONTAKT APLIKAČNÍ HLAVICE

Během aplikace dbejte na to, aby byla plocha aplikační **hlavice neustále v kontaktu s pokožkou**. Pouze tak je zajištěn rovnoměrný a efektivní přenos radiofrekvenční energie.

REAKCE PLETI NA APLIKACE

Pokud je vám působení radiofrekvence na určitém místě nepříjemné i při nejnižší intenzitě, doporučujeme snížit množství sonogelu, zkrátit dobu kontaktu aplikační hlavice s pletí nebo se této oblasti zcela vyhnout.

NASTAVENÍ INTENZITY – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při prvním kontaktu s pletí vždy začínejte na **nejnižší úrovni intenzity**. Aplikátor nejprve přiložte na partii s vyšším podílem podkožního tuku (např. tváře). Intenzitu zvyšujte postupně a vždy s ohledem na svůj subjektivní pocit. Pokud začne být aplikace nepříjemná, snižte intenzitu zpět na minimum nebo aplikaci ukončete.

PŘÍPRAVA POKOŽKY – TIP

Ošetřovaná oblast by měla být ideálně bez výraznějších chloupků. Tím se zlepší plynulost pohybu aplikační hlavice po pokožce a radiofrekvenční energie se bude lépe přenášet na povrch pleti.

PÉČE O PLEŤ PO APLIKACI – DOPORUČENÍ

Po aplikaci nevystavujte pokožku po dobu několika hodin **příliš horké vodě** a vyhněte se návštěvě sauny. Pleť po aplikaci stále prochází regeneračním procesem a nadměrné teplo by ji mohlo zbytečně podráždit. V průběhu používání přístroje dochází k zahřívání pleti – pokud pocítíte nadměrné teplo, udělejte přestávku a nechte pokožku přirozeně vychladnout.

Každá část tváře, krku a dekoltu má různou citlivost. Vždy tedy upravte výkon dle části pleti, ať již pracujete s jakoukoliv technologií.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhýbejte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

Radiofrekvence zahřívá hlubší vrstvy kůže, čímž stimuluje tvorbu kolagenu, ale krátkodobě může způsobit vazodilataci (rozšíření cév) a pocit tepla.

CO JE NORMÁLNÍ PO APLIKACI

- zarudnutí (obvykle ustoupí do 1–24 hodin),
- pocit tepla nebo „horké pleti“,
- mírný otok,
- jemná citlivost.

JAK POKOŽKU CO NEJLÉPE ZKLIDNIT

1) Chladit, ale ne ledem přímo

- Použijte **chladivý gelový sáček** nebo **studený obklad** zabalený v látce
- Chladte přibližně 5 až 10 minut v intervalech
- Nepřikládejte led přímo na kůži – může to způsobit podráždění či poškození

2) Nanést zklidňující přípravky

Vhodné jsou:

- **aloe vera gel** (čistý, bez parfemace),
- **panthenol** (např. ve formě pěny nebo krému),
- **termální voda ve spreji**,
- produkty s **niacinamidem** (snižuje zarudnutí),
- lehké **hydratační krémy bez alkoholu a parfemace**.

Vyhněte se:

- aktivním látkám jako **retinol, AHA/BHA kyseliny, vitamín C**,
- parfémovaným nebo mastným krémům.

3) Vyhnout se teplu 24–48 hodin

To znamená:

- sauna
- solárium
- horké sprchy
- intenzivní sportování (zvýšení teploty a pocení prodlouží zarudnutí)
- přímé slunce

4) Neškrábat a nedráždit pokožku

- Nemačkejte, nedrhňte, nepoužívejte peelingy.
- Pletť ponechejte v klidu.

5) Použít SPF

- Pokud jdete ven, naneste **SPF 30–50**, i když je zataženo.
- Pletť je po radiofrekvenci citlivější na UV záření.

JAK DLOUHO MŮŽE POCIT TEPLA TRVAT?


- Běžné reakce odezní během **několika hodin až jednoho dne**.
- Citlivé pleti to může být **až 48 hodin**.

GALVANICKÝ PROUD



Galvanický proud patří mezi nejčastěji využívané a osvědčené technologie v oblasti profesionální péče o pleť. Speciální aplikační hlavice generuje galvanický proud se záporným nábojem, který vytváří negativní ionty podporující prostup účinných látek přes přirozenou ochrannou bariéru pokožky. Díky tomuto procesu dochází k výrazně efektivnějšímu zapracování kosmetických přípravků hluboko do pleti. Aktivní složky obsažené v krémech, gelech a sérech jsou využity s maximální účinností, čímž se násobí jejich účinek oproti běžné aplikaci. Takzvané galvanické „zažehlení“ představuje skutečný turboefekt pro pleťovou kosmetiku – pleť je lépe hydratovaná, vyživená a viditelně sjednocená. Přístroj umožňuje individuální nastavení intenzity galvanického proudu, což zajišťuje bezpečné a komfortní aplikace pro různé typy a citlivosti pleti.

ELEKTROFORÉZA

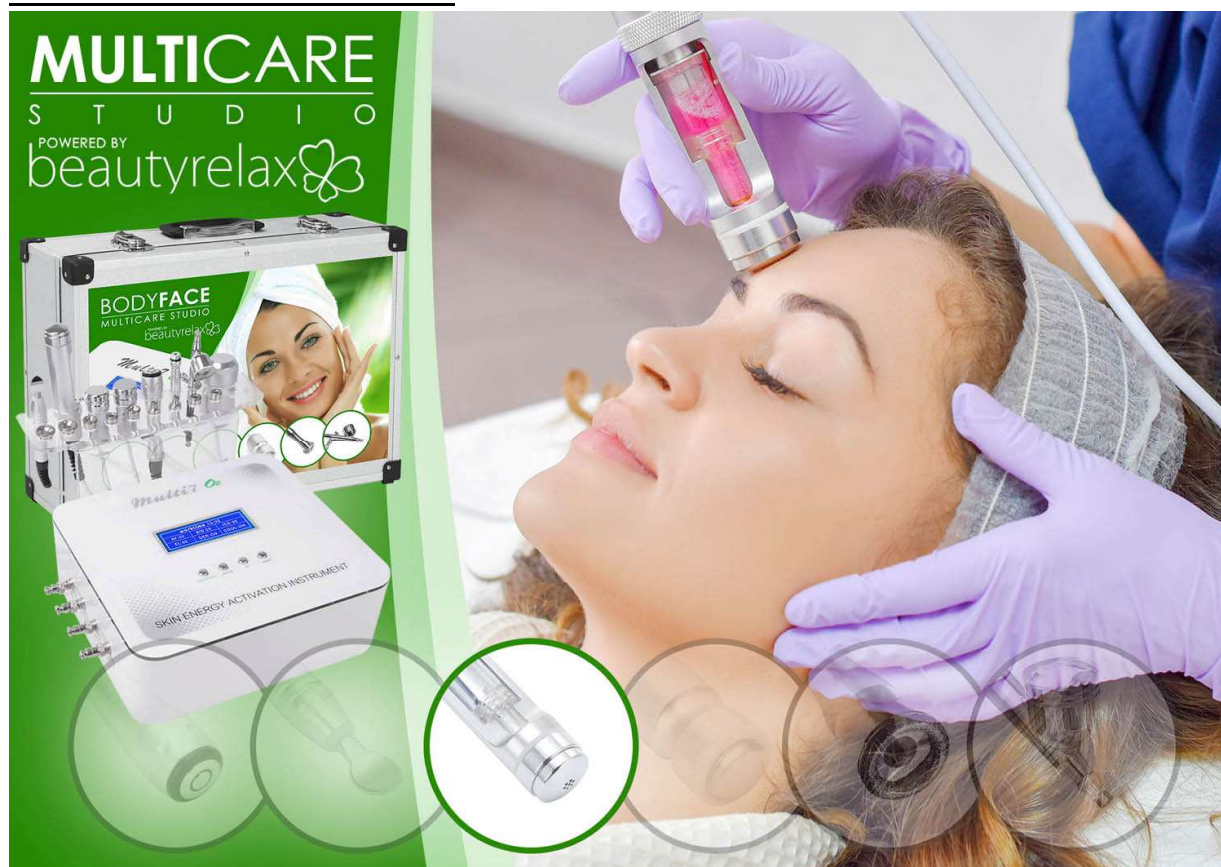

BeautyRelax Multicare Studio posouvá tradiční jehličkovou mezoterapii na zcela novou úroveň díky moderní neinvazivní technologii elektroforézy. Speciální aplikační hlavice umožňuje účinné zapracování kosmetických přípravků pomocí mikroproudu o přesně optimalizované frekvenci, aniž by jakákoliv část aplikátoru narušila povrch pleti.

Kosmetické roztoky, séra a aktivní látky jsou penetrovány hluboko do kožních vrstev bez použití jehel, což nepředstavuje žádnou zátěž pro organismus a je zcela bezpečné i při opakovaném použití. Výsledkem jsou výrazně viditelné a dlouhodobé efekty.

Neinvazivní mezoterapie podporuje hloubkovou hydrataci, intenzivní výživu pleti a účinnou penetraci přírodních extraktů a vitamínů. Přístroj pomáhá řešit široké spektrum kožních nedokonalostí, zlepšuje elasticitu, pevnost a celkovou kvalitu pokožky.


Aplikační hlavice je vybavena integrovaným zásobníkem pro opakované plnění kosmetickým přípravkem, což zajišťuje plynulou a efektivní aplikaci. Intenzitu výkonu lze snadno a přesně dávkovat podle individuálních potřeb pleti. Přípravek můžete také nannést přímo na pleť.

Žádná krev | Žádné modřiny | Žádná bolest | Žádné ostré jehličky


Zapomeňte na nepříjemné metody mikrojehličkování. Neinvazivní mezoterapie pomocí elektroforézy představuje budoucnost profesionální péče o pleť – technologii, kterou můžete využívat už dnes.

NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU

Aplikační hlavice pracuje na principu elektroforézy. Kosmetické přípravky jsou penetrovány pomocí působení mikroproudu v přesně optimalizované frekvenci. Žádná část aplikační hlavice nepronikne skrz povrch pleti. Nepředstavuje žádnou zátěž pro váš organismus. Skvělé dosažitelné výsledky. Aplikační hlavice s neinvazivní mezoterapií penetruje kosmetické roztoky přes povrch pleti hluboko do kožních vrstev. Penetrace přírodních extraktů a vitamínů. Aplikační hlavice má v sobě integrovaný zásobník pro opakované naplnění přípravkem na tekuté bázi. Snadné dávkování výkonu. Žádná krev. Žádné modřiny. Žádná bolest. Řekněte stop jehličkám, které způsobují nepříjemné pocity. Metoda mikrojehličkování je minulost. Neinvazivní mezoterapie pomocí elektroforézy budoucnost, kterou můžete využívat již nyní!

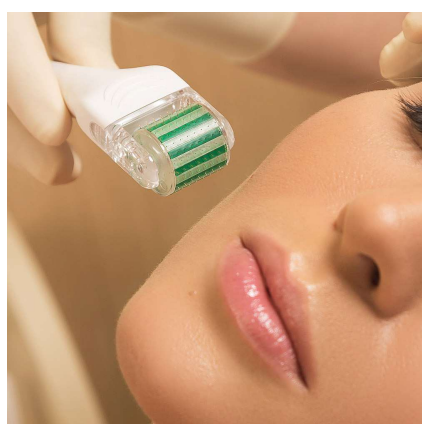

Metoda aplikace pleti s názvem „mezoterapie“ měla svůj historický vývoj. Nejprve se pro zapracování kosmetických přípravků používala (a dodnes stále používá) jehličkový váleček. Nejprve se na pleť nanese kosmetický přípravek a poté se zapracoval pomocí „ježkového“ válečku. Částice kosmetického přípravku jsou tak mechanicky penetrovány pod povrch pleti. Jedná se o invazivní metodu aplikaci pleti. Jehličky pronikají fyzicky pod povrch pleti. Přestože jsou jehličky velmi jemné, pro uživatele s citlivou pletí nemusí aplikovat způsobit příjemné pocity.

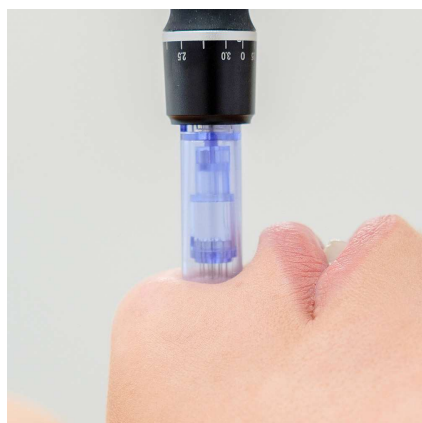

Mezoterapie se také někdy nazývá pojmem „mikrojehličkování“. Jeho další stupeň vývoje představuje kosmetický přístroj s elektronickou aplikační hlavicí. Princip činnosti je stejný, jako u klasického válečku s jehličkami. Elektronická verze je založena na automatickém pohybu sady jehliček. Přestože se jedná o určitý technologický posun, stále jde o invazivní metodu, i když hroty pronikají pouze pár milimetrů pod povrch pleti.

Trendem dnešní doby je přístrojové aplikaci pleti neinvazivního charakteru. Rozvoj moderních technologií to již umožňuje. Pokud tedy preferujete šetrný způsob aplikace pleti s maximální efektivitou zapracování účinných látek z kosmetického přípravku. Snadné, opakované použití. Bez jakékoliv zátěže pro váš organismus. Přestože se v dnešní době stále používá klasický jehličkový váleček i přístroje s automatickým „jehličkováním“, metoda mezoterapie formou elektroforézy je ve srovnání s těmito metodami absolutním vítězem!



POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ELEKTROFORÉZY

Příprava pokožky

Před každým použitím pleť důkladně očistěte a jemně osušte. Pokožka musí být zbavena make-upu, nečistot a mastnoty.

Použití bez kosmetického přípravku

Přístroj lze používat i bez ampulky s kosmetickým přípravkem. Samotná technologie elektroforézy má stimulační účinky na pleť. V tomto případě naneste na pokožku dostatečnou vrstvu sonogelu, aby byl zajištěn dokonalý kontakt technologie s povrchem pleti. Sonogel během aplikace průběžně doplňujte – část se vstřebává do pokožky a část může vysychat. **Nikdy nepoužívejte aplikační hlavici na suchou pleť.**

Správný kontakt aplikační hlavice

Elektroforéza je generována aplikační hlavici z nerezové oceli. Dbejte na to, aby byla hlavice po celou dobu v plném kontaktu s pokožkou. Doporučujeme provádět **jemné krouživé pohyby**, které usnadňují uvolňování kosmetického přípravku a jeho rovnoměrné zapracování.

Použití tekutého kosmetického přípravku (ampulky)

Pokud se rozhodnete zapracovat kosmetický přípravek v tekuté formě, přípravek se z ampulky uvolňuje otvorem umístěným přímo v aplikační hlavici, která je v kontaktu s pletí. Opět doporučujeme krouživé pohyby po pokožce.

Regulace množství přípravku

Pro uvolnění většího množství tekutiny postačí jemné potukávání aplikační hlavici o pleť. Zároveň dbejte na to, aby **zadní část aplikační hlavice s kabelem byla vždy výše než kontaktní plocha** – tekutina tak může přirozeně stékat směrem dolů.

Zachycení přebytečné tekutiny

Tekutý přípravek může během aplikace mírně stékat po pleti. Doporučujeme mít po ruce papírový kosmetický ubrousek, kterým lze přebytečnou tekutinu ihned setřít.

Použití přípravků s hustší konzistencí

Hustší kosmetické přípravky (krémy, gely) nanášejte přímo na pokožku. Zásobník na skleněnou ampulku v aplikační hlavici ponechte prázdný. Přípravek zapracujte pomocí aplikační hlavice, zbytek nechte přirozeně vstřebat do pleti.

Bezpečnostní upozornění – krk a dekolt

Při aplikaci v oblasti pod bradou, na krku a dekoltu se vyhněte intenzivní stimulaci míst, kde se nachází **lymfatické uzliny a štítná žláza**. Krátký, letmý kontakt je povolen, dlouhodobá a intenzivní stimulace je zakázána.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ELEKTROFORÉZY

Nastavení intenzity

Intenzitu vždy nastavujte podle vlastního subjektivního vnímání. Na pleti by měl být cítit **jemný pocit mravenčení**, který musí zůstat v komfortní a snesitelné úrovni. Výkon průběžně upravujte podle citlivosti jednotlivých oblastí pleti. Pokud přístroj obsluhuje jiná osoba, je nutná **neustálá komunikace** ohledně vnímaných pocitů a operativní přizpůsobení intenzity.

Kontaktní hlavice – nutná podmínka funkčnosti

Pro správnou funkci technologie je nezbytné, aby uživatel držel v jedné ruce příslušnou **kontaktní hlavici**. Toto technologické řešení umožňuje správné uzavření elektrického okruhu a účinné působení elektroforézy. Po zapojení aplikačních hlavic je vždy nutné kontaktní hlavici držet.

Plnění ampulky

Ampulka se skládá ze dvou částí. Pro její naplnění sejměte horní část. Spodní část ampulky poté snadno naplníte vybraným kosmetickým přípravkem a opět uzavřete.

TEPELNÁ TERAPIE - PŮSOBENÍ CHLADU



Chladová terapie zajišťuje okamžité zklidnění pleti a představuje ideální závěrečnou fázi každé pleťové aplikace. Během několika minut dochází k návratu pokožky do přirozené teplotní rovnováhy, což výrazně přispívá ke zvýšení komfortu po aplikaci. Působení chladu má výrazný zklidňující efekt, pomáhá redukovat začervenání a podporuje stažení kožních pórů, čímž pleť získává sjednocenější a svěžejší vzhled. Velká plochá aplikační hlavice s ergonomickým tvarem se pohodlně drží v ruce a umožňuje efektivně ochladit i hůře dostupné záhyby obličeje. Intenzitu chladového účinku lze plynule nastavit v rozsahu od 1 do 10, od jemného ochlazení až po maximální chlad, a přizpůsobit ji tak individuálním potřebám pleti i citlivosti klienta.

DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRAZE



Diamantová mikrodermabrazie s vakuovým sáním

Diamantová mikrodermabrazie představuje vysoce účinnou metodu hloubkového čištění pleti kombinovanou s **vakuovým sáním**. Přístroj je vybaven sadou **9 aplikačních diamantových korunek** s různou hrubostí a průměrem, což umožňuje přesné přizpůsobení aplikace **různým typům pleti i citlivosti klienta**.

Díky dostatečně dlouhé a flexibilní vzduchové hadici je zajištěna snadná manipulace a komfortní práce i při delších aplikacích. Diamantové abrazivní korunky se vyznačují **mimořádně dlouhou životností**, a jsou proto ideální pro intenzivní komerční provoz.

Účinky diamantové mikrodermabrazie

- jemné obroušení odumřelých kožních buněk a povrchových reziduí
- odstranění mikročástic make-upu a nečistot usazených v kožních pórech
- hloubkový peeling pleti a uvolnění pórů
- prevence tvorby akné a komedonů
- podpora krevního oběhu a okysličení pokožky
- sjednocení barevného tonusu pleti
- zvýšení elasticity a pevnosti pokožky
- stimulace kolagenních a elastických vláken
- jemná mechanická masáž pleti

Princip účinku

Čistá pleť je základem zdravého a mladistvého vzhledu. **Pravidelné hloubkové čištění pleti** pomocí diamantové mikrodermabraze významně přispívá ke zpomalení procesu stárnutí a ke zlepšení celkové kvality pokožky. Speciální aplikační hlavice s diamantovým povrchem při pohybu po pleti **šetrně mechanicky obrušuje vrchní vrstvu pokožky**, zatímco vakuové sání současně **odsává uvolněné nečistoty a odumřelé kožní buňky**. Ty jsou zachyceny pomocí filtračního tampónku, což zajišťuje maximální hygienu aplikace.

Technologie pracuje **ve dvou fázích současně**:

1. jemná, ale účinná exfoliace odumřelých buněk
2. okamžité odsátí uvolněných částic pomocí vakuového sání

Komfort a bezpečnost aplikace

Pro maximální pohodlí a bezpečnost je přístroj vybaven **plynulým nastavením intenzity vakuového sání**. Pomocí otočného regulačního kolečka lze snadno zvolit sílu odsávání podle citlivosti pleti a ošetřované oblasti. Aplikace je **neinvazivní, bezbolestná a bez nepříjemných pocitů**. Výsledkem je na dotek hladká, svěží a zdravě vypadající pleť, připravená pro další kosmetické procedury nebo aplikaci aktivních látek.



Trápí vás některý z těchto problémů?

- Póry kůže jsou hrubější než obvykle.
- Pleť není barevně sjednocená.
- Dochází k výskytu pigmentových skvrnek.
- Pleť není dostatečně pružná.
- Pleť působí unaveným dojmem.

**Pokud je odpověď alespoň v jednom případě ano
technologie diamantové mikrodermabraze
nabízí účinné řešení!**

Stres, nesprávný spánkový režim, nevyvážená strava, držení neustálých diet, působení nečistot v ovzduší. Jedny z mnoha faktorů, které mají nezanedbatelný vliv na tvorbu akné, vrásek, výskyt pigmentových skvrn a celkovou ztrátu pružnosti pleti. Zdroj celé řady kožních problémů lze nalézt v nedostatečné péči o pleť v období dospívání a období kolem dvacátého roku života. Nic však není ztraceno! Diamantová mikrodermabraze je účinným nástrojem, který působení negativních vlivů na pleť výrazně eliminuje.




Zpětná vazba uživatelů na dotaz, jaký měli pocit při krátkodobém používání diamantové mikrodermabrazy:

- 93% žen pociťují hladší pokožku
- 93% žen pociťuje zpevnění kůže
- 89% žen pociťuje zvýšení elasticity kůže
- 91% žen pociťuje celkově mladistvější vzhled kůže

Skoncovat s make-upem není sen!

Nová přístrojová metoda diamantové mikrodermabrazy pracuje na principu velmi jemného mechanického peelingu aplikačními koncovkami pokrytými diamantovou drtí různé hrubosti a průměru, které obrušují vrchní vrstvičku kůže, čistí a oživují ji. Zlepšuje se prokrvení kůže, dochází ke stimulaci kolagenních a elastických vláken. Výsledkem je hladší, svěží pleť, lepší tonus (pleť je barevně jednotnější), povrchové pigmentové skvrnky a póry se výrazně zjemňují.

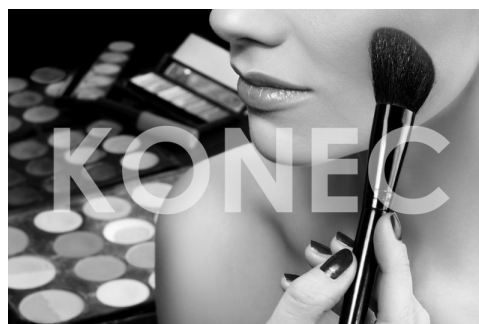

Vakuové sání zajišťuje optimální kontakt aplikační hlavice s pokožkou a zároveň účinně odsává rezidua odumřelých kožních buněk. Tím dochází k výraznému zvýšení efektivity následných i kombinovaných aplikací – v pokožce nezůstávají žádné zbytky cizorodých částic ani abrazivních krystalů. Plet tak zůstává v přirozeném, čistém a nekontaminovaném stavu, díky čemuž je schopna mnohem lépe reagovat na další aplikace, které mohou bezprostředně následovat.

Vyčištěná a uvolněná pokožka navíc umožňuje výrazně lepší pronikání aktivních složek kosmetických přípravků, čímž se násobí jejich účinnost a celkový efekt aplikace.

Technologie diamantové mikrodermabraze si účinně poradí s celou řadou kožních nedokonalostí. Pomáhá redukovat pigmentové skvrny, rozšířené póry, zjemňuje hypertrofické jizvy, jizvy po akné či neštovicích a příznivě ovlivňuje také jemné vrásky a strie.


Mikrodermabraze představuje moderní formu pletové rejuvenace, která stimuluje obnovu pokožky a podporuje tvorbu nových, zdravých a elastických kožních buněk odolnějších vůči vnějším vlivům. Dochází tak k viditelnému omlazení pleti, zpomalení procesu stárnutí a celkovému zlepšení kvality pokožky.

Aplikace je zcela neinvazivní a řadí se mezi tzv. procedury „na polední pauzu“. Celková doba aplikace trvá pouze několik minut a klient se může ihned vrátit ke svým běžným aktivitám.



ÚČINKY PŮSOBNÍ ABRAZE PLETI

Uvolnění kožních pórů

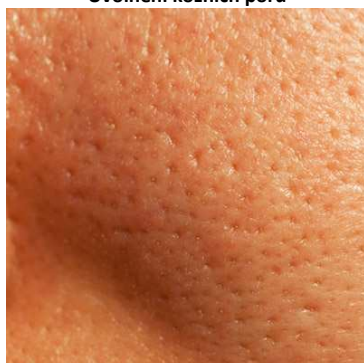

Potlačení aknézní pleti



Podpora krevního oběhu



Odstranění odumřelých buněk a nečistot



Vyrovnění barevného tonusu pleti



Zvýšení elasticity pleti



Mechanická masáž pokožky



Prevence proti tvorbě černých teček




Hlubkový peeling pleti



ABRAZIVNÍ KORUNKY

Abrazivní korunky - různé velikosti (9 kusů)

Součástí balení je 9ks abrazivních korunek. Mají různý průměr a hrubost. Díky tomu se můžete snadno zaměřit na všechny části obličeje nebo vybrané části těla. Velké aplikátory pro větší plochu pleti. Malé aplikátory se dostanou do všech záhybů. Vysoká hrubost korunky určena pro případy, kdy je velká vrstva odumřelých kožních buněk a reziduí. Naopak korunky s nízkou hrubostí využijete na velmi citlivá místa, jako např. oblast kolem očí.

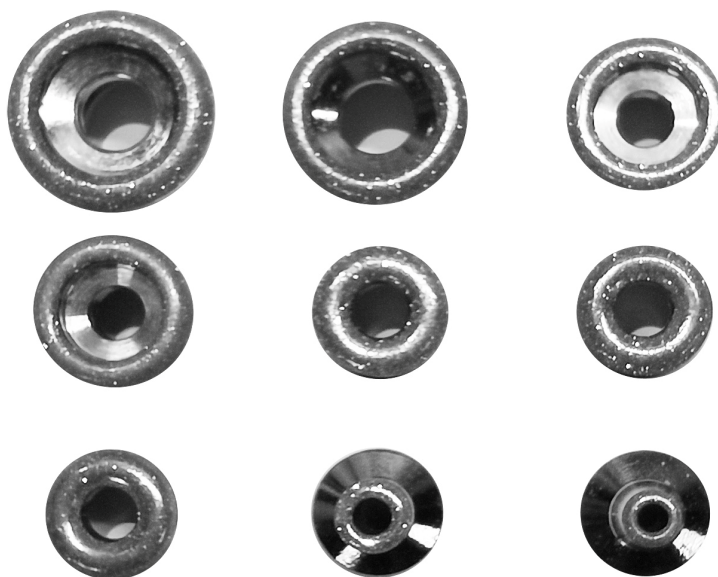

Aplikační hlavice

Aplikační hlavice je určena pro instalaci některé z abrazivních korunek. Druhý konec připojte ke vzduchové hadici. Vždy se ujistěte, že je vzduchová hlavice ke konektoru aplikační hlavice připojena nadoraz.



FILTRAČNÍ VATOVÉ TAMPÓNKY

Vatové tampónky jsou důležitou součástí při používání přístroje. Fungují jak mechanická bariéra. Jeho hlavním smyslem je zabránit vniknutí jakékoliv částice nečistoty dovnitř přístroje. **Pokud je přístroj používán pro komerční účely, filtrační vatový tampónek je nezbytné vyměnit po každé aplikaci klienta.** Jedná se o spotřební materiál. V případě potřeby dokoupit náhradní balení využijte kontaktního formuláře na našich stránkách: www.beautyrelax.cz



VZDUCHOVÉ HADICE A VZDUCHOVÝ FILTR

Nezbytnou součástí pro funkčnost celého systému představuje soustava vzduchových hadic a vzduchových filtrů. Vzduchové hadice zajišťují přívod vzduchu pod pozitivním tlakem do hydratační pistole. Pro aplikační hlavice diamantové abraze pleti naopak zajišťují podtlak pro dostatečně kvalitní nasátí pokožky. Vzduchové filtry jsou spotřební materiál. Mají extrémně dlouhou životnost. Pokud by však jevíly známky snížené účinnosti (vytvářely by silnou bariéru vzduchovému proudění) nebo byly výrazně znečištěné vizuální kontrolou, filtry vyměňte za nové. Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách: www.beautyrelax.cz



1. Připojení do hlavní jednotky přístroje ke konektoru hydratační pistole
2. Vzduchová hadice určena pro připojení hydratační pistole
3. Připojení do hlavní jednotky přístroje ke konektoru aplikační hlavice dermabraze
4. Vzduchová hadice určena pro připojení aplikační hlavice dermabraze

INSTALACE APLIKÁTORU DERMABRAZE



Z balení vyberte libovolnou vzduchovou hadici. Jeden konec vzduchové hadice připojte k aplikační hlavici diamantové abraze pleti. Ujistěte se, že je spojení „nadoraz“. Zabráníte tak případné netěsnosti.



Druhý konec hadice připojte k hadici se vzduchovým filtrem. Vyberete libovolnou hadici s filtrem. Ujistěte se, že je spojení „nadoraz“. Zabráníte tak případné netěsnosti.



Hadici vzduchového filtru připojte ke konektoru na hlavní jednotce. Připojte ke konektoru na pravé straně dle vyobrazení.

INSTALACE FILTRAČNÍHO TAMPÓNKU



Uchopte do ruky aplikační hlavici.




Nasaďte vatový filtrační tampónek. Ujistěte se, že plně pokrývá celý otvor v hlavici.



Našroubujte abrazivní korunku. Postupujte se zvýšenou opatrností, aby filtrační tampónek zůstal na svém místě.

VOLBA ABRAZVINÍ KORUNKY

Užitná hodnota přístroje pro diamantovou abrazi pleti závisí na dvou základních faktorech. Možnosti nastavení výkonu vakuového sání a vyměnitelných korunek, které jsou součástí balení. Estetický přístroj MULTICARE STUDIO nabízí až 9 vyměnitelných korunek s různým průměrem koncového otvoru. Více vyměnitelných korunek tak zajišťuje maximální variabilitu použití pro dosažení co nejlepších výsledků aplikace. Vždy začínejte s korunkami s nižší mírou hrubosti. Vyzkoušejte, jak na tuto hrubost vaše pokožka reaguje. Takto postupně zvyšujte hrubost. Hrubost korunky si před našroubováním na aplikační hlavici vyzkoušejte dotekem prstu.

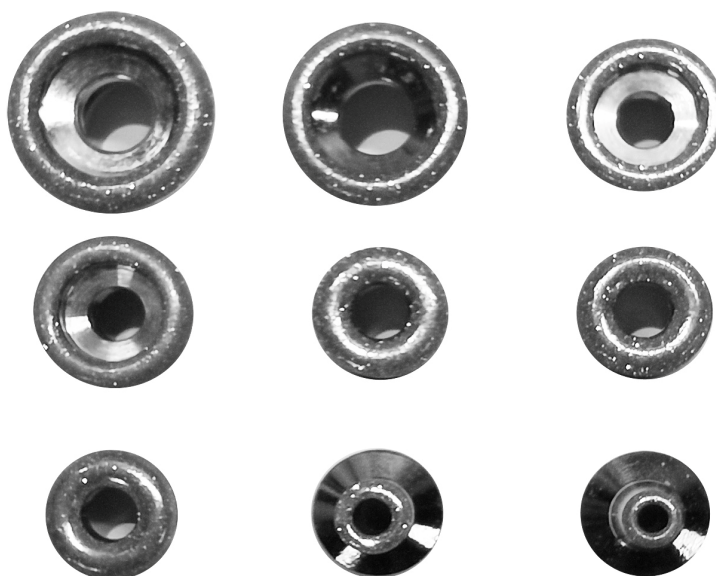

Možnosti použití jednotlivých korunek

Obličej není rovná jednolitá plocha. Má celou řadu záhybů, menších či větších ploch, které je třeba důkladně aplikovat. Je třeba si uvědomit, že podkožní vrstva bývá v různých částech odlišná. Šetrnost aplikace lze výrazně ovlivnit pomocí nastavitelné úrovně síly vakuového sání. Jak tedy jednotlivé korunky používat? Je to velice snadné. Střední průměr aplikátoru pro větší partie obličeje jako např. tváře, brada, líce, čelo. Menší průměr aplikátoru pro oblasti koutků úst, velice jemných ploch zejména kolem očí nebo ve velmi úzkých záhybech. V případě korunek s velkým průměrem se můžete zaměřit např. na vybrané části těla (loket, dlaně, vybrané části chodidel).

NASTAVENÍ VÝKONU NASÁVÁNÍ

Jak bylo již v předchozí pasáži uvedeno, obličej je tvořen plochami o různé velikosti s odlišnou vrstvou podkožního tuku a různou citlivostí. Z těchto důvodů je přístroj vybaven funkcí dávkování výkonu vakuového nasávání. Nízký výkon je určen pro velmi citlivé partie pleti s menší velikostí. Naopak vysoký výkon je optimální pro větší plochy s větším výskytem nečistot nebo mastnoty. Využití výkonu je individuální. Začínajte vždy na nízké úrovni a výkon postupně zvyšujte. Časem si osvojíte, jaký typ aplikátoru v kombinaci s příslušným výkonem je vhodný pro jednotlivé části obličeje. V případě hydratační pistole si pomocí nastavení intenzity upravíte výkon, kterým má přístroj tlakovat vzduch, který proudí do hydratační pistole.



NEŽ ZAČNETE MIKRODERMABRAZI POUŽÍVAT

Před zahájením samotné aplikace přístrojem pokožku důkladně očistěte a zbavte veškeré mastnoty, nečistot a make-upu. Po očištění vyčkejte, až pleť zcela uschne – před použitím přístroje nesmí být na pokožce přítomny žádné stopy vlhkosti.


Před prvním použitím přístroje doporučujeme provést test snášenlivosti. Vyzkoušejte aplikaci například na vnitřní straně předloktí a vyčkejte přibližně 1 hodinu, zda se neobjeví nežádoucí reakce pokožky na působení aplikační hlavice s abrazivním účinkem. Teprve poté přistupte k aplikaci na obličej nebo jiné citlivější partie.

DOPORUČENÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Přístroj nepoužívejte na silně zjizvenou pokožku ani na místa s narušenou kožní strukturou.
- Přístroj není vhodný pro použití při ekzémech, dermatitidě nebo jiných aktivních kožních onemocněních.
- V případě citlivé pleti používejte přístroj maximálně 1× týdně. U normální pleti je doporučená frekvence maximálně 2× týdně.
- Při aplikaci netlačte aplikační hlavici nadměrnou silou. Aplikace by mělo probíhat jemně a plynule.
- Po aplikaci se může objevit mírné začervenání pokožky, které je běžnou reakcí a obvykle odezní během 5 až 10 minut.
- Po aplikaci doporučujeme aplikovat vyživující nebo regenerační masku, krém či noční péči, které podpoří obnovu pokožky.
- Před pobytem venku, zejména při silném slunečním záření, je nezbytné použít ochranný krém s UV filtrem (SPF).
- Po dobu následujících 3 dnů po aplikaci se vyhněte jakýmkoli dalším chemickým nebo mechanickým peelingům.
- Stejně tak po dobu 3 dnů nepoužívejte depilační ani epilační přístroje a neprovádějte epilaci voskem.
- Po aplikaci obličeje lze po zklidnění pleti téměř okamžitě aplikovat make-up, dle individuální potřeby.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ

- Pokud se rozhodnete používat funkci diamantové mikrodermabraze, je třeba od vzduchové hadice **odpojit hydratační pistoli** - viz. následující obrázek. V opačném případě není možné funkci diamantové mikrodermabraze používat.

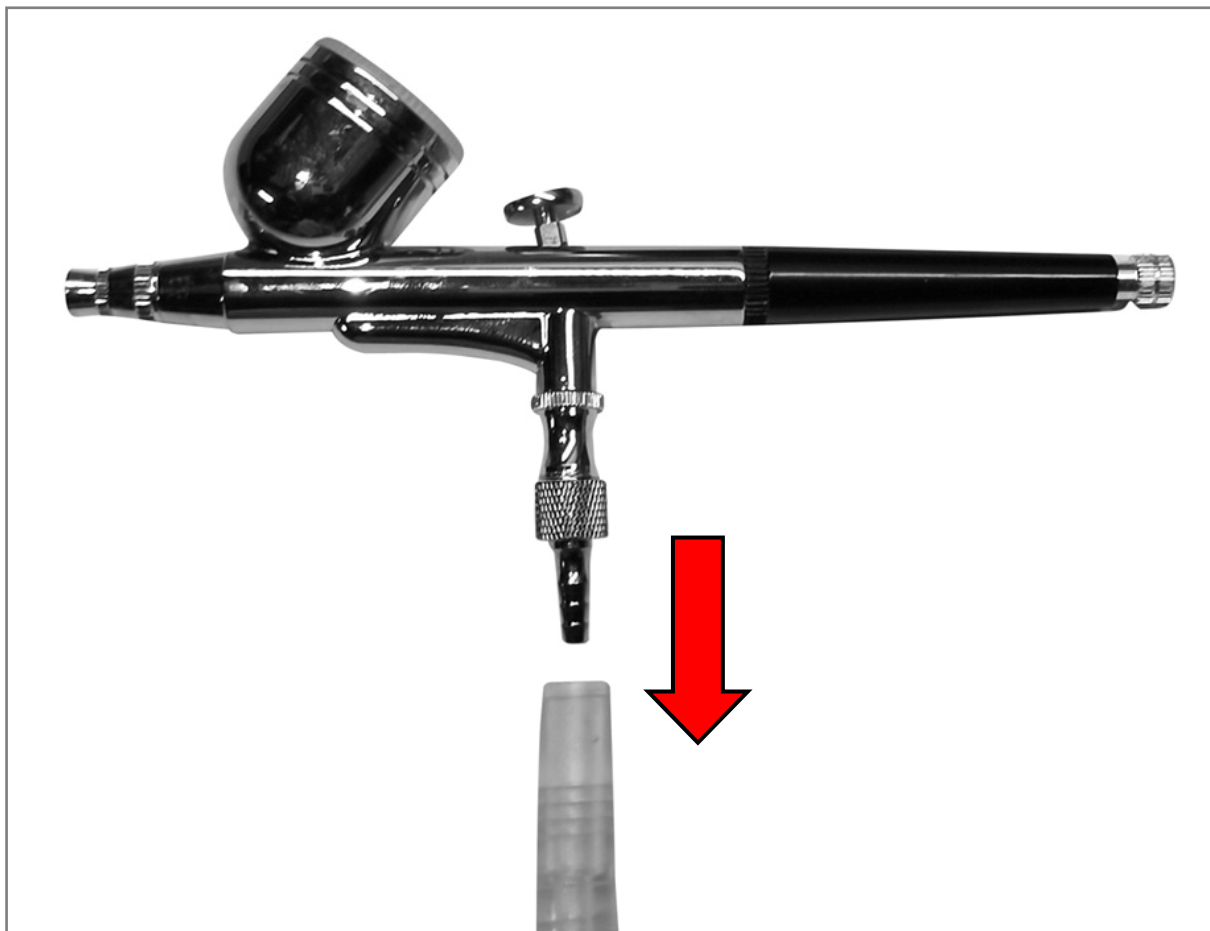

- Uvolní se průchod celého vzduchového systému a kompresor přístroje bude vytvářet plynulý podtlak pro aplikační hlavici diamantové mikrodermabraze.
- Pokud budete mít hydratační pistoli ke vzduchové hadici připojenou, nelze plnohodnotně využívat druhou hadici s aplikátorem pro diamantovou mikrodermabrazi.
- Pokud se rozhodnete využívat funkci hydratace, připojte pistoli ke vzduchové hadici.


HYDRATACE PLETI



Nano pistole je vysoce účinná kosmetická pomůcka určená pro okamžitou a intenzivní hydrataci pleti. Výrazně zvyšuje účinnost běžných hydratačních přípravků na vodní bázi a umožňuje dodat pokožce potřebnou vláhu během několika málo sekund. Přístroj pracuje s atomizérem nové generace, který dopravuje tekutinu ze zásobníku přímo do rozprašovací jednotky. Zde dochází k rozštěpení molekul roztoku na nanočástice, jež jsou následně přeměněny na jemnou ionizovanou nano mlhu.

Vzniklé částičky mají menší velikost než samotný kožní pór, díky čemuž hydratační přípravek snadno proniká přes horní vrstvu pleti a je efektivně vstřebáván. Výsledkem je okamžitě hydratovaná, svěží a projasněná pleť s maximálním účinkem. Nano pistole je vhodná pro všechny typy pleti, včetně pleti citlivé a dehydratované, a představuje ideální řešení pro rychlé osvěžení, závěrečnou fázi kosmetického aplikace i každodenní péči.


INSTALACE HYDRATAČNÍ PISTOLE

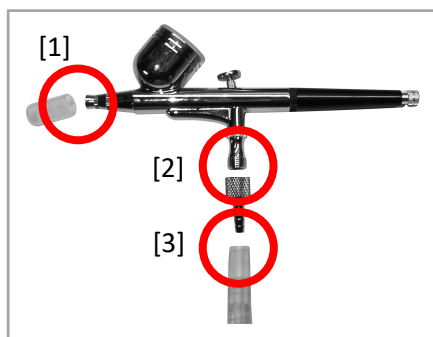

Odstraňte kryt aplikátoru hydratační pistole [1]. Našroubujte kovový prstenec na spodní stranu pistole [2]. Utáhněte „nadoraz“. Ke spodnímu hrotu prstence připojte jeden konec vzduchové hadice [3]. Ujistěte se, že je spojení „nadoraz“. Zabráníte tak případné netěsnosti.



Druhý konec hadice připojte k hadici se vzduchovým filtrem. Vyberete libovolnou hadici s filtrem. Ujistěte se, že je spojení „nadoraz“. Zabráníte tak případné netěsnosti.

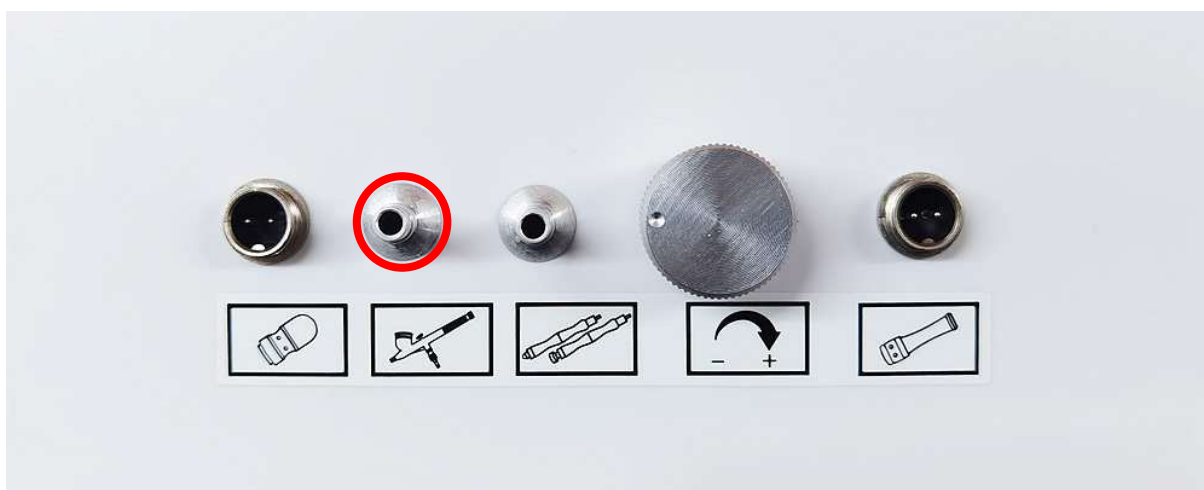

Hadici vzduchového filtru připojte ke konektoru na hlavní jednotce. Připojte ke konektoru na levé straně dle vyobrazení.

OVLÁDÁNÍ HYDRATAČNÍ PISTOLE



1. Výstup „studené mlhy“
2. Zásobník na hydratační roztok
3. Spoušť
4. Regulační ventil průtoku vzduchu
5. Spojka mezi pistolí a vzduchovou hadicí

POUŽITÍ HYDRATAČNÍ PISTOLE

1. Zásobník [2] naplňte hydratačním roztokem. Využijte plastový dávkovač.
2. Pomocí ventilu [4] si můžete upravit průtok vzduchu. Utažením po směru hodinových ručiček průchod vzduchu snížíte. Uvolněním po směru hodinových ručiček průchod uvolníte. Ventil reguluje také pohyb spouště [3].
3. Ujistěte se, že je spojka [5] pevně dotažena k tělu pistole. Rovněž se ujistěte, že je konec spojky upevněn „na doraz“ do vzduchové hadice.
4. Posunutím spouště [3] zahájíte působení „studené mlhy“. Hydratační pistolí se pohybujte v přiměřené vzdálenosti od pokožky. Hlavním smyslem je přesné zacílení, aby „studená mlha“ pokryla zvolenou část pokožky.

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

Vodová séra:

- Sérum s hyaluronovou kyselinou (nízká a vysoká molekulární hmotnost).
- Antioxidační sérum (vitamín C, vitamín E, niacinamid).
- Sérum s peptidy nebo ceramidy pro regeneraci pleti.

Tekuté hydratační emulze:

- Lehké, nekomedogenní emulze bez olejů.
- Termální voda nebo minerální voda ve spreji (např. La Roche-Posay, Avene).

Přípravky s nízkou viskozitou:

- Roztoky s aloe vera.
- Kyselina listová nebo fermentované přípravky (např. „ferment lysát“).

Ředitelné produkty:

- Pokud je přípravek příliš hustý, můžete jej naředit destilovanou vodou v poměru 1:1 (např. husté gely).

NEVHODNÉ PŘÍPRAVKY (RIZIKO UCPÁNÍ!)

Oleje a olejové textury

- Rostlinné oleje, silikony, mastné sérum.
- Proč? Oleje se špatně rozprašují a zanechávají v atomizéru lepkavý film.

Husté krémy a gely s částicemi

- Krémy s fyzikálními UV filtry (zinkem, oxidem titaničitým).
- Gely s peelingovými částicemi.

Alkoholové nebo astringentní přípravky

- Přípravky s vysokým obsahem alkoholu.
- Proč? Alkohol vysušuje a může poškodit vnitřní mechanismy pistolky.

Viskózní látky

- Med, sirupy, kolagenové gely bez ředění.
- Proč? Mohou vytvářet neprůchodné zátky v atomizéru.

CO DĚLAT, KDYŽ SE ZÁSOBNÍK UCPE?

1. Vypněte přístroj a odpojte hydratační pistolí.
2. Odšroubujte hydratační pistolí od kabelu.
3. Ponořte atomizér na 15 minut do destilované vody s kapkou octa.
4. K odstranění zbytků použijte měkký štěteček (např. štětec od starého make-upu).
5. Nikdy nepoužívejte jehly nebo kovové nástroje – poškodí jemné trysky.

METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU



METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU

1. Čelo

- Pohybuj hlavicí **od středu čela směrem do stran k vlasové linii**
- Pohyby jsou **vodorovné, plynulé a lehce tažené ven**
- Postupuj po čele **odspodu nahoru**, aby byla pokryta celá plocha

2. Oblast mezi obočím (kořen nosu)

- Ved' hlavicí **od kořene nosu směrem vzhůru ke středu čela**
- Pohyb je **rovný, jemný a tažený nahoru**

3. Nos

- Začni u kořene nosu
- Pohybuj se **směrem dolů po hřbetu nosu**
- Po stranách nosu ved' pohyby **lehce šikmo ven směrem k tvářím**

4. Oční okolí (mimo oční víčka)

- Pohyby ved' **po kostním okraji očnice**, nikdy ne přímo na víčko
- Začni u vnitřního koutku oka
- Pokračuj **obloukovým pohybem směrem ven a lehce nahoru k spánkům**
- Pohyb je **velmi jemný, pomalý a plynulý**

5. Tváře

- Začni u nosu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k uším a lehce nahoru**
- Pohyby mohou být:
 - obloukové
 - nebo krátké tahy směrem vzhůru
- Cílem je **podpora liftingového efektu**

6. Oblast nad horním rtem

- Neaplikuj přímo na rty
- Pohybuj hlavicí **od středu nad horním rtem směrem šikmo nahoru k nosním křídlům**
- Pohyb je **jemný a krátký**

METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU

7. Okolí úst

- Začni u koutků úst
- Veď pohyb **směrem ven a lehce nahoru**
- Vyhni se přímému kontaktu se rty
- Pohyby jsou **obloukové, zjemňující mimické linie**

8. Brada a oblast pod bradou

- Na bradě veď pohyby **od středu brady do stran**
- Pod bradou pohybuj hlavicí **směrem vzhůru k čelisti**
- Pohyby jsou **tažené nahoru**, podporující zpevnění kontur

9. Krk

- Pohyby veď **od spodní části krku směrem vzhůru k bradě**
- Na stranách krku můžeš vést pohyb **šikmo nahoru**
- Vyhni se silnému tlaku v oblasti štítné žlázy

10. Dekolt


- Začni u středu dekoltu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k ramenům**
- Pohyby jsou **široké, plynulé a jemně tažené**

Obecná doporučení

- Pohyby jsou vždy **plynulé, pomalé a kontrolované**
- Netlač, nech hlavicí klouzat po pleti

Vždy se snaž pohybovat **směrem nahoru nebo ven**, nikoli dolů

MAPA CITLIVOSTI PLETI

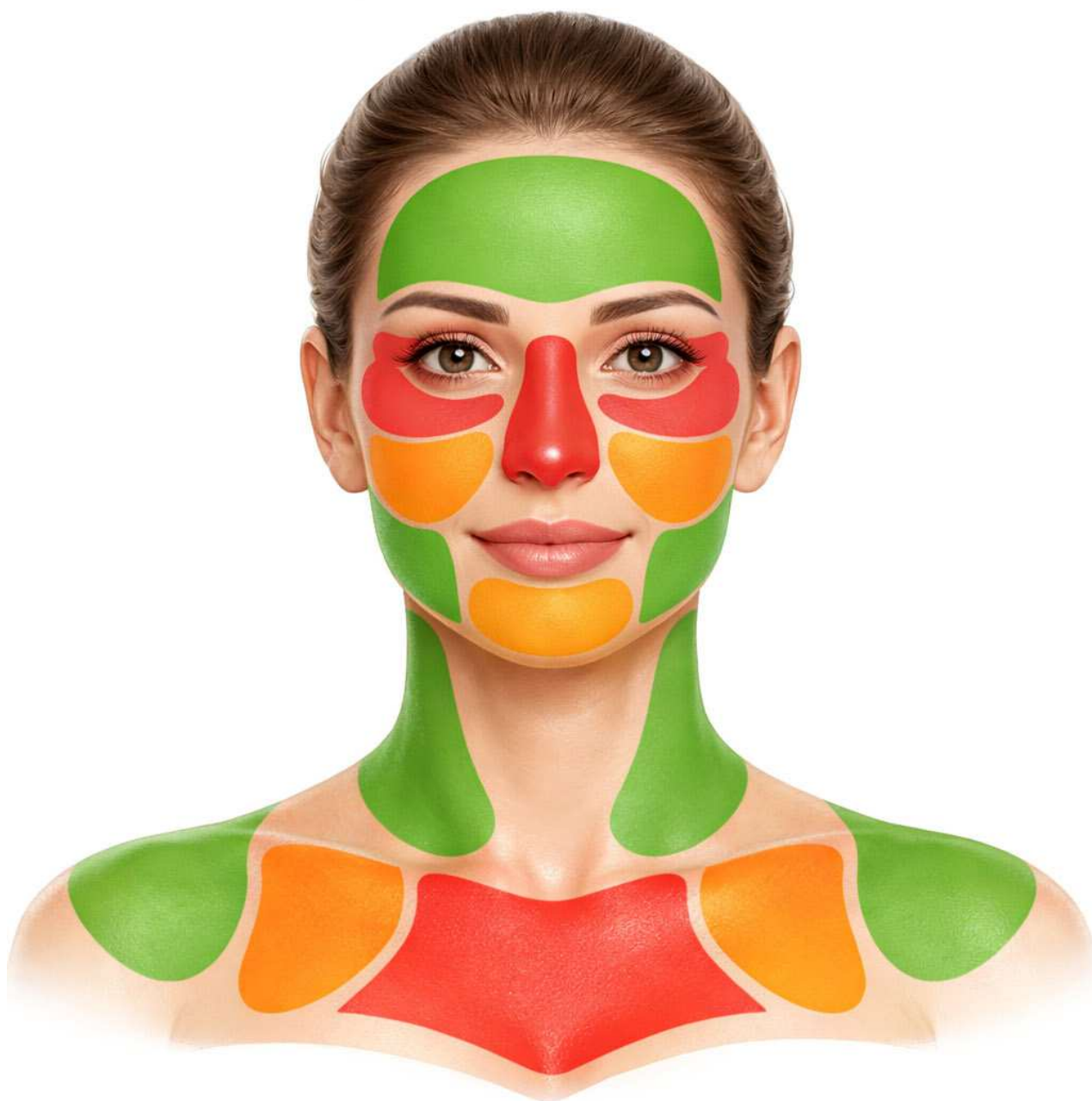


● NÍZKÁ CITLIVOST

● STŘEDNÍ CITLIVOST

● VYSOKÁ CITLIVOST

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj zapnete stisknutím hlavního tlačítka na zadní straně hlavní jednotky do polohy 1.
2. Spuštění přístroje doprovází zapnutí ventilátorů a modře podsvíceného displeje. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Můžete začít s přístrojem pracovat.
3. Pomocí tlačítka **SWITCH** si můžete přepínat mezi jednotlivými režimy přístroje - **WORKTIME**, **RF**, **EL**, **BIO**, **DER**, **ICE**, **OXI**. Možnost nastavení daného režimu signalizuje zvýraznění symbolu dané funkce.
4. Pomocí tlačítek **UP** a **DOWN** si můžete nastavit **zvýšení/snížení** času, **zvýšení/snížení** úrovně intenzity dané funkce nebo **zapnutí/vypnutí** diamantové mikrodermabraze a hydratační pistole.
5. Pomocí tlačítka **START/STOP** můžete zapnout nebo pozastavit danou funkci, která je na displeji zvýrazněna.
6. Pokud je u funkce **RF**, **EL**, **BIO**, **ICE** nastavena hodnota **0**, daná funkce je vypnuta. Pokud je u těchto funkcí nastavena hodnota od **1** do **10**, funkce je aktivní, pokud je aktivní také odpočítávání času. Pokud odpočítávání času neprobíhá, činnost přístroje je pozastavena. Spuštění a pozastavení činnosti přístroje je možné nastavit pomocí tlačítka **START/PAUSE**.
7. Přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného času. Poté můžete pokračovat v používání přístroje nebo přístroj vypněte.
8. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka na zadní straně do polohy 0.
9. V rámci udržení co nejdelší životnosti přístroje doporučujeme po skončení používání aplikační hlavice ponechat přístroj v pohotovostním režimu alespoň v délce 5 minut. Zapnutý ventilátor má tak dostatečný časový prostor přístroj plynule ochladit.
10. Vždy je možné používat diamantovou mikrodermabrazi NEBO hydratační pistoli. Přístroj má jedno vzduchové čerpadlo, které upravuje proudění vzduchu. Pokud chcete používat funkci diamantové mikrodermabraze, hydratační pistole musí být odpojena od kabelu. Pokud je hydratační pistole zapojena, není možné používat funkci diamantové mikrodermabraze.

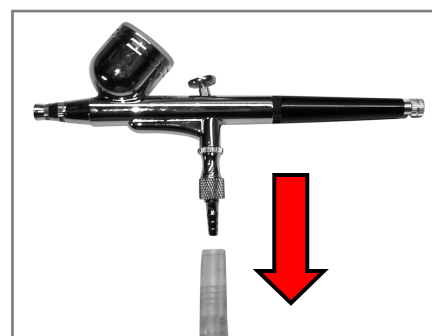

ČASOVÝ ROZSAH PRÁCE S HLAVICEMI

1. Radiofrekvence

Doporučený čas:

10 až 20 minut

- menší partie (kontury obličeje): 5 až 10 min
 - celý obličej: 10 až 15 min
 - obličej + krk + dekolt: max. 20 min
- aplikace musí být plynulá, bez setrvávání na jednom místě
 - pleť má být příjemně teplá, nikoliv přehřátá

2. Galvanický proud

Doporučený čas:

5 až 10 minut

- zapracování séra / krému: 5 až 8 min
 - citlivá pleť: spíše spodní hranice
- vhodné jako **aktivní fáze výživy pleti**
 - není nutné prodlužovat – efekt se dostavuje rychle

3. Elektroforéza (neinvazivní mezoterapie)

Doporučený čas:

8 až 15 minut

- lokální aplikace (vrásky, kontury): 5 až 8 min
 - celý obličej: 10 až 12 min
 - obličej + krk: max. 15 min
- jemné mravenčení je v pořádku
 - ideální pro intenzivní hydrataci a regeneraci

ČASOVÝ ROZSAH PRÁCE S HLAVICEMI

4. Tepelná terapie – chlad

Doporučený čas:

3 až 8 minut

- zklidnění po invazivnějších technologiích: 3 až 5 min
- výrazné stažení pórů a zklidnění: až 8 min
- vždy jako **závěrečná fáze aplikace**
- intenzitu chladu přizpůsobit citlivosti pleti

5. Diamantová mikrodermabraze

Doporučený čas:

5 až 10 minut

- jemná exfoliace: 3 až 5 min
- intenzivnější obnova pleti: 7 až 10 min
- nikdy nepřejíždět jedno místo opakovaně
- nepřekračovat doporučený čas – méně je více

6. Hydratace pleti

(např. zapracování hydratačních přípravků, sonogel, séra)

Doporučený čas:

5 až 10 minut

- jako samostatné aplikace: 8 až 10 min
- jako součást procedury: 5 až 7 min
- ideální po mikrodermabrazi nebo RF
- pleť by měla zůstat komfortní, bez pnutí

ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU

1. ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Odstranění sonogelu/nanášeného přípravku.
- Hlavici otřete měkkým, suchým ubrouskem (např. mikrovlákno) nebo vatičkou.
- Pokud je gel zaschlý, můžete použít vlhčený ubrousek bez alkoholu (určený pro elektroniku).

2. DEZINFEKCE (POKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ VÍCE OSOB)

Postup dezinfekce:

- Nastříkejte isopropylalkohol (70–80%) ve spreji na hadřík (NE přímo na hlavici!).
- Jemnými pohyby otřete povrch hlavice.
- Nechte zcela vyschnout (alkohol se rychle odpaří).

Pozor! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (aceton, čpavek, chlor).

3. OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

- Hlavici NENAMÁČEJTE – voda by mohla poškodit elektroniku.
- Po čištění vždy důkladně osušte suchým hadříkem.

4. DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA

- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, aplikujte na kovové části hlavice tenkou vrstvu antiseptického přípravku (např. lékařský alkohol), aby nedošlo k oxidaci.
- Skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

5. UPOZORNĚNÍ

- Neponořujte hlavici do vody ani čisticích roztoků!
- Nepoužívejte abrazivní materiály (kartáče, drátěnky)!
- Nepoužívejte horkou vodu nebo páru!

DOPORUČENÍ PRO PRODLUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

- Čistěte hlavici ihned po použití – zabráníte zasychání gelu.
- Při dezinfekci používejte pouze isopropylalkohol – nepoškozuje materiály.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození (praskliny, koroze).

ŽIVOTNOST A OPOTŘEBENÍ APLIKAČNÍCH HLAVIC

Všechny aplikační hlavice přístroje jsou považovány za spotřební materiál. Při běžném používání dochází v průběhu času k jejich přirozenému opotřebení a postupné degradaci, která je dána mechanickým namáháním, působením energie jednotlivých technologií, kontaktem s pletí, kosmetickými přípravky i pravidelnou dezinfekcí.

Životnost aplikačních hlavice je proto výrazně kratší než životnost hlavní provozní jednotky přístroje a jejich funkčnost může skončit ještě před uplynutím záruční lhůty vztahující se na hlavní set.

Je důležité si uvědomit, že nesprávné používání může proces degradace výrazně urychlit. Mezi nejčastější faktory, které negativně ovlivňují životnost hlavice, patří zejména:

- používání nadměrného výkonu nebo překračování doporučené délky aplikace,
- nedostatečné množství kontaktního gelu (u technologií, kde je vyžadován),
- aplikace na nevhodně připravenou pleť (znečištěnou, vlhkou nebo s přítomností kosmetických přípravků),
- používání nevhodných nebo agresivních dezinfekčních prostředků,
- mechanické namáhání, pády nebo nesprávné skladování hlavice.

V důsledku výše uvedených faktorů může dojít ke zhoršení funkčnosti aplikační hlavice, snížení účinnosti aplikace, nepříjemným pocitům při aplikaci nebo k jejímu úplnému selhání.

Z tohoto důvodu je nezbytné dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze, používat aplikační hlavice v souladu s jejich určením a pravidelně kontrolovat jejich stav. Včasná výměna opotřebené hlavice je klíčová nejen pro zachování kvality aplikace, ale také pro bezpečný a spolehlivý provoz přístroje. V případě potřeby kontaktujte prodejce, který má k dispozici kompletní příslušenství.

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma SANTADRIA s.r.o. IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454 tímto výslovně prohlašuje, že nenese odpovědnost za jakékoliv jednání, způsob, použití či aplikaci produktu ze strany zákazníka. Zákazník je plně odpovědný za veškeré následky vyplývající z užívání produktu. Proávající nenese žádnou odpovědnost za právní důsledky způsobené tím, že by produkt mohl být v rozporu s platnou legislativou, obzvláště s legislativou týkající se podmínek pro používání přístrojů obdobného typu s ohledem na komerční použití přístroje zákazníkem. Jakákoliv povinnost zjišťovat splnění právních předpisů je na straně zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že je jeho výhradním úkolem zajistit, aby použití produktu bylo v souladu se zákony, předpisy a normami aplikovatelnými v konkrétní jurisdikci. Tento text představuje úplnou a konečnou dohodu o vyloučení odpovědnosti prodávajícího za aplikační účely produktu a nahrazuje jakoukoliv předchozí ústní či písemnou komunikaci týkající se odpovědnosti za produkt.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jaké výsledky mohu očekávat po aplikaci radiofrekvence?

Reakce pleti na radiofrekvenční aplikace jsou vždy individuální a závisí na řadě faktorů, jako je typ pleti, věk, hydratace a pravidelnost aplikace. Bezprostředně po aplikaci může být pleť **mírně zarudlá** a díky penetraci vlhkosti ze sonogelu působí **svěžejším a projasněným dojmem**. V ošetřovaných partiích dochází k **lokálnímu zvýšení teploty**, což je přirozený projev působení radiofrekvenční energie. Skutečný liftingový efekt však vzniká postupně – v průběhu několika hodin až dnů dochází k **remodelaci kolagenových a elastických vláken**, která jsou zodpovědná za pevnost a pružnost pleti. Neinvazivní lifting pomocí radiofrekvence není jednorázový proces. Pro dosažení a udržení výsledků je nutná **pravidelná stimulace**, obvykle **3–4× měsíčně**. Při ukončení pravidelné péče se pleť postupně vrací do původního stavu. Minimální doporučený rozestup mezi aplikacemi stejné partie je **7 dní**.

Jak lze působení radiofrekvence na pleti vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavičky s pokožkou pronikají radiofrekvenční vlny do hlubších vrstev kůže (dermis). Tento proces je vnímán jako **postupně narůstající pocit tepla**. Nejedná se o přímé zahřívání pleti zvenčí, ale o **průvodní efekt působení radiofrekvenční energie**. Cílem technologie je přesné zacílení energie na vrstvu dermis při optimální frekvenci a výkonu, nikoliv povrchové přehřívání pokožky.

Může radiofrekvenční hlavička pleť poškodit?

Ano, při nesprávném nastavení výkonu je teoreticky možné pokožku podráždit. Přístroj je však záměrně vybaven **širokým rozsahem výkonu**, aby bylo možné jej bezpečně používat u osob s různou citlivostí pleti a různou tloušťkou podkožní tukové vrstvy. Jednou z hlavních výhod přístroje je jeho **flexibilita** – nízký výkon pro citlivé partie, vyšší výkon pro méně citlivé a větší plochy. Při nastavování intenzity je nutné postupovat **pozvolna a s maximální opatrností**, vždy podle subjektivního pocitu.

Je přístroj zdravotnickým prostředkem?

Ne. Přístroj **není zdravotnickým prostředkem**. Spadá do kategorie masážních a estetických přístrojů. Není určen k léčbě jakýchkoliv kožních onemocnění. Nabízí však ověřené technologie, které **významně přispívají ke zlepšení kondice, vzhledu a vitality pleti**.

Jak často provádět čištění pleti diamantovou mikrodermabrazí?

Díky vysoké účinnosti a intenzitě technologie je ideální interval **1–2× měsíčně**. Tento rytmus umožňuje dlouhodobě udržovat pleť čistou, svěží a zdravou bez rizika přetížení pokožky.

Omezuje diamantová mikrodermabraze klienta po aplikaci?

Bezprostředně po aplikaci může dojít k **mírnému začervení pleti**, které je způsobeno stimulací krevního oběhu a lymfatického systému. Tento efekt obvykle odezní během několika minut. Aplikace je proto často označována jako procedura „**na obědovou pauzu**“ – klienta nijak společensky neomezuje.

Je diamantová mikrodermabraze bolestivá?

Ne. Přestože se jedná o mechanickou exfoliaci vrchní vrstvy odumřelé pokožky, aplikace je **bezbolestná**. Díky vakuovému sání je aplikace většinou vnímána jako **příjemná, uvolňující masáž**. Součástí balení je **9 vyměnitelných diamantových korunek** s různou hrubostí a průměrem, které umožňují ideální přizpůsobení každému typu pleti.

Proč je diamantová mikrodermabraze označována jako pleťová rejuvenace?

Tato technologie stimuluje **obnovu pokožky**, podporuje tvorbu nových, zdravých a elastických buněk a zvyšuje jejich odolnost vůči vnějším vlivům. Dochází tak k **viditelnému omlazení pleti**, zpomalení stárnutí a zlepšení její struktury.

Pro jaké typy pleti je diamantová mikrodermabraze vhodná?

Aplikace je vhodná **pro všechny typy pleti**. Omezení se týká pouze pleti s aktivním kožním onemocněním. Zvýšenou opatrnost je třeba věnovat **velmi tenké a vysoce citlivé pleti**.

Lze do hydratační pistole přidávat další látky nebo vůně?

Ano, ale pouze za předpokladu, že **nedojde ke změně hustoty tekutiny**. Příliš husté roztoky nebo kapaliny s mechanickými částicemi mohou **ucpat atomizér**.

Čím je vhodné naplnit ampulku pro elektroforézu?

Lze použít **jakýkoliv kosmetický přípravek na tekuté bázi** s vysokým obsahem účinných látek. Příliš husté přípravky lze naředit **destilovanou nebo kojeneckou vodou**. Konzistence musí umožnit plynulé uvolňování tekutiny otvory v aplikační hlavici.

Jak poznám správně nastavenou intenzitu elektroforézy nebo galvaniky?

Na pleti by měl být cítit **jemný až střední pocit mravenčení**, který je stále komfortní. Intenzitu je nutné průběžně upravovat podle citlivosti konkrétní partie. Při aplikaci jiné osobě je nezbytná **aktivní komunikace s klientem**.

Co dělat, když se z aplikátoru uvolňuje málo tekutiny?

Nejčastější příčinou je **příliš hustá konzistence přípravku**. Doporučuje se jej naředit. Uvolňování tekutiny je aktivováno pohybem hlavice po pleti, případně jemným potukáváním.

Lze kombinovat sonogel a tekutý kosmetický přípravek?

Ano. Sonogel neovlivňuje účinnost aktivních látek. Je však nutné dbát na to, aby **nedošlo k ucpání výstupního otvoru**. Alternativně lze použít buď sonogel, tekutý přípravek v ampulce, nebo hustší kosmetický přípravek aplikovaný přímo na pleť.

Jak postupovat, pokud s přístrojem teprve začínám?

Pečlivě si prostudujte celý návod. Začněte pomalu, testujte jednotlivé technologie na různých částech obličeje, sledujte reakce pleti a postupně si osvojte optimální techniku pohybu i nastavení výkonu.

Proč je důležitá péče o aplikační hlavice?

Po každém použití je nutné hlavice **očistit, dezinfikovat (ideálně alkoholovým sprejem) a důkladně vysušit**. Zajistíte tak maximální hygienu a zabráníte šíření bakterií.

Má přístroj certifikaci?

Ano. Přístroj splňuje **standardní evropské certifikační normy**. Prohlášení o shodě lze na vyžádání zaslat elektronicky (kontakt: mh@santadria.cz).

Je přístroj vodotěsný?

Ne. Přístroj **není vodotěsný** a žádná jeho část není určena k mytí pod tekoucí vodou.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

PO - PÁ 11:00 - 18:00
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Kosmetický přístroj BeautyRelax Multicare Studio

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2824**

EAN 8594166120419

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019**

Produkt je svým provedením, výkonem a užitnými vlastnostmi vhodný pro komerční účely do masážního nebo kosmetického studia. **Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Teplota působení radiofrekvence 40°C.**

Přístroj nenarušuje integritu pleti. Nabízí neinvazivní aplikaci na pleti. Je určen pro příjemné prohřátí pleti teplem.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.12.2022

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Martin Hrbek', is written over a dotted line.

Martin Hrbek, jednatel