

NÁVOD K OBSLUZE

Galvanická žehlička pleti s fotonovou terapií
limitovaná edice Beautyrelax leioung GOLD

3 světla fotonové terapie

BR-1030



OBSAH

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	5
SPECIFIKACE	6
OBSAH BALENÍ	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
GALVANICKÝ PROUD	6
POPIS REŽIMŮ GALVANICKÉHO PROUDU	8
FOTONOVÁ TERAPIE	9
POPIS PŘÍSTROJE	10
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	11
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	12
POUŽITÍ SONOGELU	13
KOMBINACE A ČETNOST POUŽÍVÁNÍ	14
DIAGRAM JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ	14
JEDNOTLIVÉ KROKY OŠETŘENÍ PLETI	15
POZNÁMKY KE GALVANICKÉMU PROUDU	15
KROK 1: ČIŠTĚNÍ PLETI - CLEANSE	15
KROK 2: OBNOVA - NOURISH	15
KROK 3: LIFTING - LIFT	16
POZNÁMKY K FOTONOVÉ TERAPII	16
KROK 4: MODRÉ SVĚTLO	16
KROK 5: ČERVENÉ SVĚTLO	16
KROK 6: ZELENÉ SVĚTLO	17
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	18
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	19
DBEJTE PŘI KAŽDÉM POUŽITÍ	19
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	20
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	21
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	21
CERTIFIKACE	21
DOVOZCE	21
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	22

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtete všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtete tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržáním bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Galvanická žehlička s fotonovou terapií je moderní kosmetický přístroj, který kombinuje hned několik technologií ošetření. Vaše pleť bude hýčkaná galvanickým proudem, červeným, zeleným a modrým světlem fotonové terapie. Dopřejte si krásný, přirozený a mladistvý vzhled! Efektivní a účinná profesionální péče jako ze salonu!

Kosmetický přístroj beautyrelax leioung GOLD nabízí dvě technologie ošetření pleti: galvanický proud a fotonovou terapii. Každá má specifické vlastnosti a účinky. Galvanický proud, který generuje aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli, urychluje metabolismus ve všech vrstvách kůže a celkovou detoxikaci podkožní tkáně. Červené fotonové světlo přirozeným způsobem podporuje tvorbu kolagenu. Zelené fotonové světlo působí mimo jiné protizánětlivě. Modré světlo má

antibakteriální účinky. Pozitivní vliv pro hubení bakterií, které přispívají ke vzniku akné. Používání přístroje je naprosto bezpečné a bezbolestné. Díky snadnému ovládání zvládnete jeho obsluhu v pohodlí domova. K dispozici budete mít celkem 4 aplikátory (jeden na galvanický proud a tři na fotonovou terapii). Možnost nastavení režimu galvanického proudu - čištění, obnova, lifting. Na výběr jsou 3 úrovně intenzity - nízká, střední, vysoká. Ošetření je vhodné pro všechny typy pleti!



SPECIFIKACE

- Tři režimy galvanického proudu - čištění, obnova, lifting.
- Nastavení 3 úrovní výkonu galvanického proudu: nízký, střední, vysoký.
- Aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli.
- Používání je naprosto bezpečné a bezbolestné.
- Šetrný k pokožce.
- Vhodný pro všechny typy pleti.
- Kompaktní, malý a lehký.

OBSAH BALENÍ


- Kosmetický přístroj Beautyrelax leioung GOLD BR-1030.
- 4 aplikační hlavice (3x fotonová terapie, 1x galvanický proud).
- Napájecí USB kabel.
- Návod k obsluze.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napětí: +7 V ~ +12 V -7 V ~ -12V.
- Vlnová délka červeného světla: 625nm.
- Vlnová délka zeleného světla: 525nm.
- Vlnová délka modrého světla: 465nm
- Každý aplikátor fotonové terapie má 36 LED diod.
- Rozměry: 5,5x16x5 cm.
- Hmotnost: 190 g.
- Napájení: USB kabelem (součástí balení).

GALVANICKÝ PROUD

Ošetření pleti galvanickým proudem je vysoce účinná metoda, která se používá v profesionálních salonech krásy. Při působení proudu na pleť dochází k vyplavování iontů z buněk. Urychlí se metabolismus ve všech vrstvách kůže a dalších tkání. Přírodním způsobem se odplaví toxické látky. Všechny tyto atributy jsou nezbytné pro krásnou, zdravou a mladistvou pleť. Póry pokožky se zprůchodní, což násobně zvýší účinnost vstřebávání účinných látek v krémech a kosmetických přípravcích.

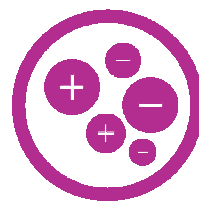

HLAVNÍ ÚČINKY PŮSOBNÍ GALVANICKÉHO PROUDU


- Vyplavení iontů z buněk.
- Urychlení metabolismu ve všech vrstvách kůže.
- Přírodním způsobem se odplaví všechny toxické látky.
- Zvýšení propustnosti pórů pokožky.
- Násobné zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek z kosmetických přípravků.

GALVANICKÝ PROUD

Aplikační hlavice vytváří na svém povrchu proud s možností proměnlivého náboje. Řídící jednotka kosmetického přístroje umožňuje úpravu galvanického proudu takovým způsobem, aby docházelo ke kladnému či zápornému náboji. Kladná a záporná ionizace má odlišné účinky na pleť.


Kladná ionizace - důkladné vyčištění pleti

Nečistota je nabitá negativním nábojem. Aplikační hlavice vytváří naopak kladné ionty, které přitahují nečistoty jako magnet a vytahují na povrch, kde ji lze snadno odstranit. Nečistota se zachycuje nejen na povrchu pokožky, ale hluboko v pórech.

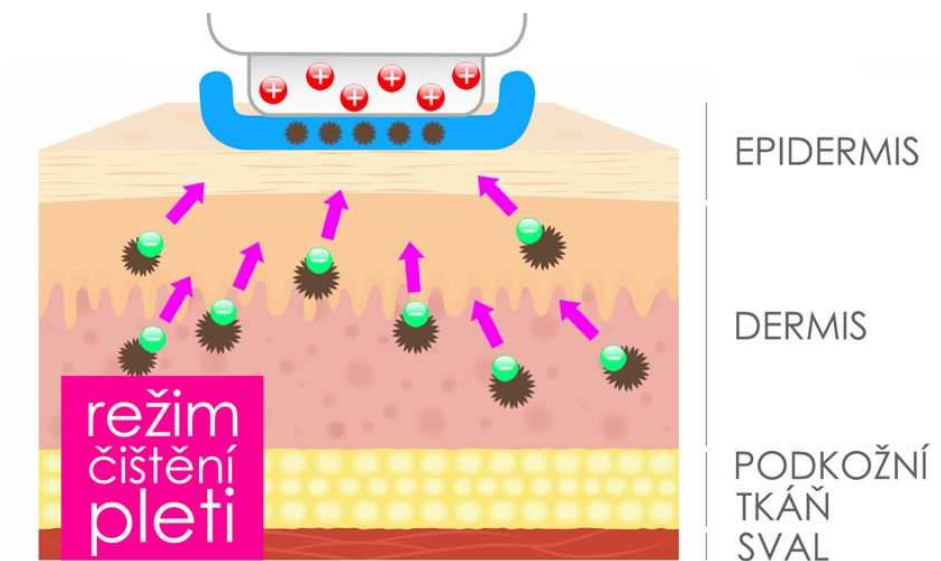

Záporná ionizace - hlubkové vyživení pleti


Aplikační hlavice generuje velké množství záporných iontů, které jsou navázané na kladné ionty v kožních buňkách. Vytvoří se tak optimální cesta, aby se živiny z krémů dostaly co nejdále do pokožky. Při běžné aplikaci krému většinu absorbuje svrchní vrstva pokožky (epidermis). Zbytek bez jakéhokoliv dalšího využití vyschne bez užitku.

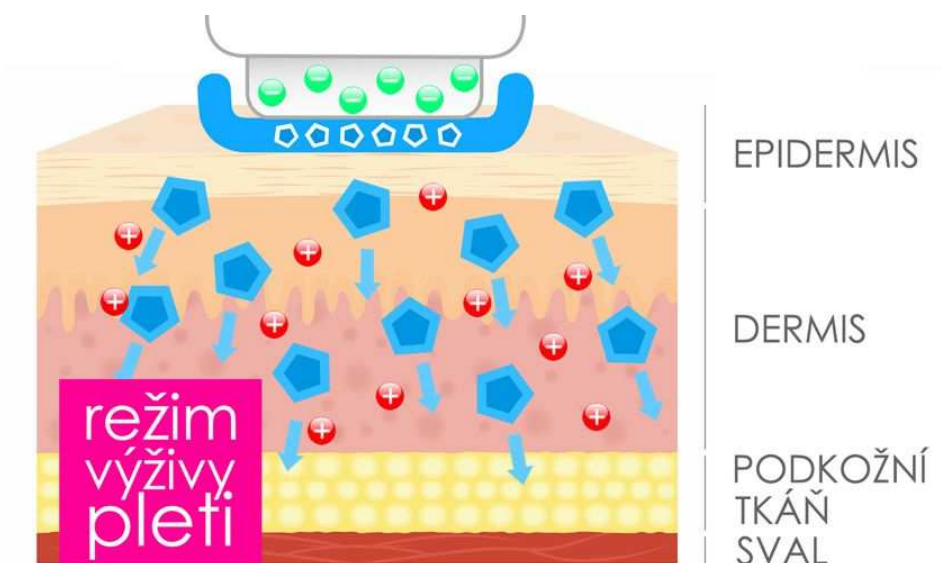

POPIS REŽIMŮ GALVANICKÉHO PROUDU


Režim čištění | CLEANSE

Aplikační hlavice působí na pleť proudem s kladnými ionty. Záporně nabitý čistící přípravek napomáhá z pleti extrahovat veškerou mastnotu a nečistoty. Působením galvanické žehličky v tomto režimu významně napomáhá přenosu škodlivých látek pryč z pokožky.

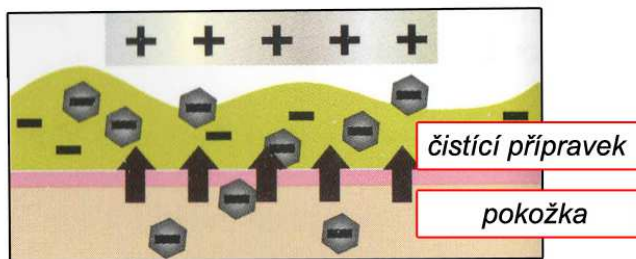


Obnova | NOURISH

Aplikační hlavice působí na pleť proudem se zápornými ionty. Záporně nabité pleťové sérum proniká snadněji přes pokožku. Transport výživových látek do podkoží je tak výrazně zvýšen. Aplikace pleťových sér se stává efektivnější.

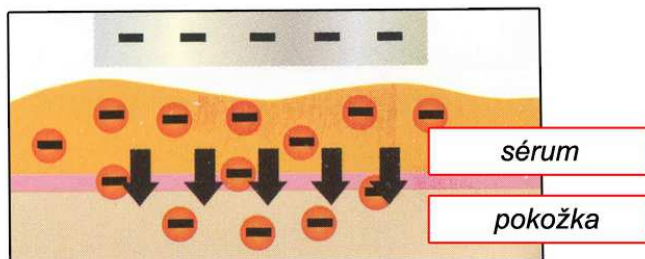

Lifting | LIFT

Aplikační hlavice působí na pleť proudem, který střídavě mění kladné a záporné ionty. Proud s proměnlivou polarizací aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.

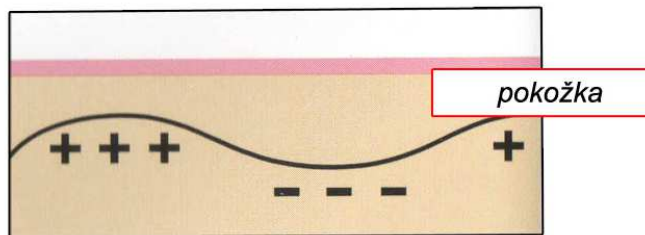

režimy ošetření galvanickým proudem



1. cleanse



2. nourish




3. lift



FOTONOVÁ TERAPIE

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.

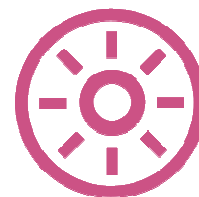

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

ČERVENÉ SVĚTLO

- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků.
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni.
- Brání v tvorbě pigmentu.

ZELENÉ SVĚTLO

- Protizánětlivý účinek (pozitivní vliv pro hubení bakterií, které následně přispívají ke vzniku akné pleti)
- Zpomaluje produkci melaninu o 40 až 60%
- Pomáhá eliminovat pigmentové skvrny
- Vyrovnává barevný tonus pokožky

MODRÉ SVĚTLO

- Aktivuje porphyryny
- Chemická reakce, která ničí škodlivé bakterie
- Antibakteriální a protizánětlivý účinek
- Prevence proti tvorbě akné
- Bezpečné a efektivní ošetření


POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice
2. Tlačítko ON/OFF
3. Tlačítko fotonové terapie
4. Tlačítko galvanického proudu
5. Nastavení intenzity galvanického proudu
6. Páčka pro uvolnění aplikační hlavice
7. Kontaktní elektroda galvanického proudu



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

Ovládací panel

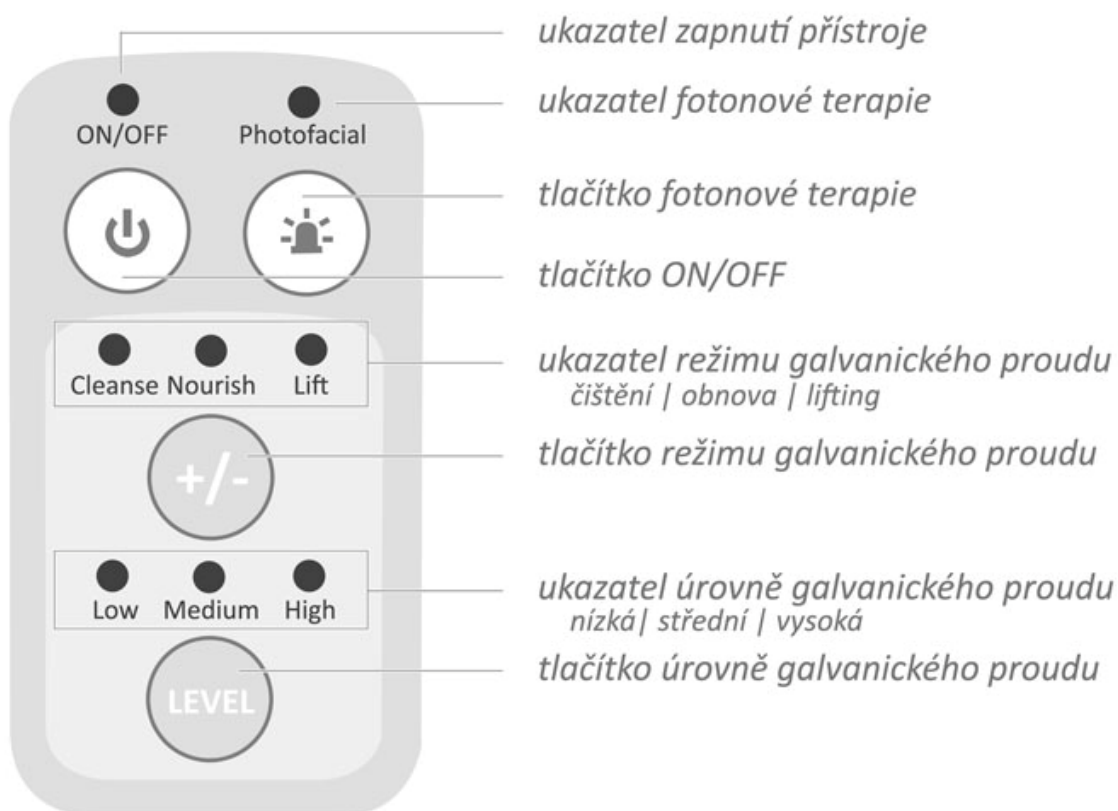

Součástí balení je sada 4 aplikátorů

(zelené světlo, červené světlo, modré světlo, galvanický proud)



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Zajistěte plné nabití baterie přístroje. Napájecí kabel zapojte do přístroje ze spodní strany. Druhý konec kabelu zapojte do USB portu počítače nebo notebooku. Baterie se nabíjí minimálně po dobu 2 hodin. Během nabíjení svítí červená kontrolka. Jakmile je baterie plně nabita, červená kontrolka zhasne.



2. Na přístroj nasadte příslušný aplikátor. Pro vyjmutí aplikátoru je třeba posunout páčku na zadní straně přístroje.
3. Přístroj zapnete **DLOUHÝM** stisknutím tlačítka **ON/OFF**. Zazní zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka.
4. Při použití hlavice pro terapii galvanickým proudem stiskněte tlačítka **CLEANSE**, **NOURISH** nebo **LIFT** (čištění, obnova nebo lifting pleti).
5. Pomocí tlačítka **LEVEL** si nastavte intenzitu působení galvanického proudu **LOW**, **MEDIUM** nebo **HIGH** (nízká, střední, vysoká).
6. Při ošetření galvanickým proudem musí svítit kontrolka **ON/OFF** a dále kontrolky signalizující režim galvanického proudu a intenzitu (**LEVEL**).

Důležité:

Vždy je v režimu galvanického proudu nezbytné **dotýkat se jedním prstem kovové elektrody** na zadní straně přístroje. V opačném případě nebude galvanický proud na pleť působit!

Upozornění:

Působení galvanického proudu je cítit **jemným mravenčením pleti** (obvykle při nejvyšší nastavené intenzitě). Míra vnímání mravenčení záleží individuálně na citlivosti pleti uživatele.

Doporučení:

Před ošetřením pleti aplikační hlavicí pro galvanický proud doporučujeme nanést na pleť mírnou vrstvu vašeho oblíbeného kosmetického krému či séra. Můžete také využít klasický čirý vodivý sonogel (dostupný v každé prodejně zdravotnických potřeb). Zlepší se vodivost a galvanický proud bude snáze působit na pokožku).

Tip:

Ošetřenou pleť nevystavujte v délce minimálně 3 dnů příliš horké vodě. Pokožka prochází po ošetření rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.

7. Při použití aplikátoru fotonové terapie stiskněte tlačítko PHOTOFACIAL – rozsvítí se červená kontrolka.

Diody fotonové terapie svítí pouze, jsou li v kontaktu s pletí. Pokud nejsou v kontaktu s pokožkou, nesvítí.

8. Aplikační hlavici pohybujte postupně, pomalu a opakovaně po celém obličeji – viz. grafické znázornění na následující straně. Platí pro režim galvanického proudu. V případě fotonové terapie ošetřujte pleť způsobem „razítkováním“.
9. Přístroj vypnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**.

Poznámka:
BĚHEM POUŽÍVÁNÍ FOTONOVÉ TERAPIE SE NIKDY NEDÍVEJTE PŘÍMO NA APLIKAČNÍ HLAVICI.

Upozornění:
PŘI VÝMĚNĚ APLIKAČNÍ HLAVICE POSTUPOJTE NÁSLEDOVNĚ: VŽDY PŘÍSTROJ NEJPRVE VYPNĚTE – VYMĚŇTE HLAVICI – A ZNOVU ZAPNĚTE.

POUŽITÍ SONOGELU

Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Galvanický proud tak může lépe proniknout přes svrchní vrstvu pleti. Použít můžete jakýkoliv kosmetický přípravek na vodní bázi (kosmetický krém, sérum, ...).

KOMBINACE A ČETNOST POUŽÍVÁNÍ


Kosmetický přístroj Beautyrelax leioung GOLD poskytuje dvě základní technologie pro ošetření pleti – galvanický proud a fotonové světlo. Pro dosažení co nejlepších výsledků je důležitá délka a četnost ošetření. Při ošetření pleti postupujte podle následující tabulky:

typ pleti	normální / suchá / vrásčitá		mastná / citlivá	
		s akné	bez akné	bez akné
galvanický proud cleanse, nourish, lift	1. měsíc používání			
	každý den	každý den	každý den	každé 3-4 dny
	Po 1 měsíci používání			
	1-2 krát / týden	1-2 krát / týden	1 krát za 2 týdny	1-2 krát / týden
	Používání po delší dobu			
modré světlo	každý den	–	každý den	–
červené světlo	každý den	každý den	každý den	každý den
zelené světlo	každý den	každý den	každý den	každý den

V levém sloupci je shora uveden typ vaší pleti. Dále četnost ošetření galvanickým proudem a fotonovým světlem podle barvy aplikátoru. Tabulka slouží pouze jako doporučení. Pokud si během používání osvojíte vlastní způsob používání s mírnou úpravou, není to problém. Přesto doporučujeme začít nejprve s aplikátorem pro funkci galvanického proudu a posléze aplikátor s fotonovým světlem. Při použití aplikátorů s fotonovým světlem doporučujeme použít nejprve modré světlo, poté červené a následně zelené.

DIAGRAM JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ

Pleť můžete ošetřit pomocí vyměnitelných aplikačních hlavic v následujícím pořadí:

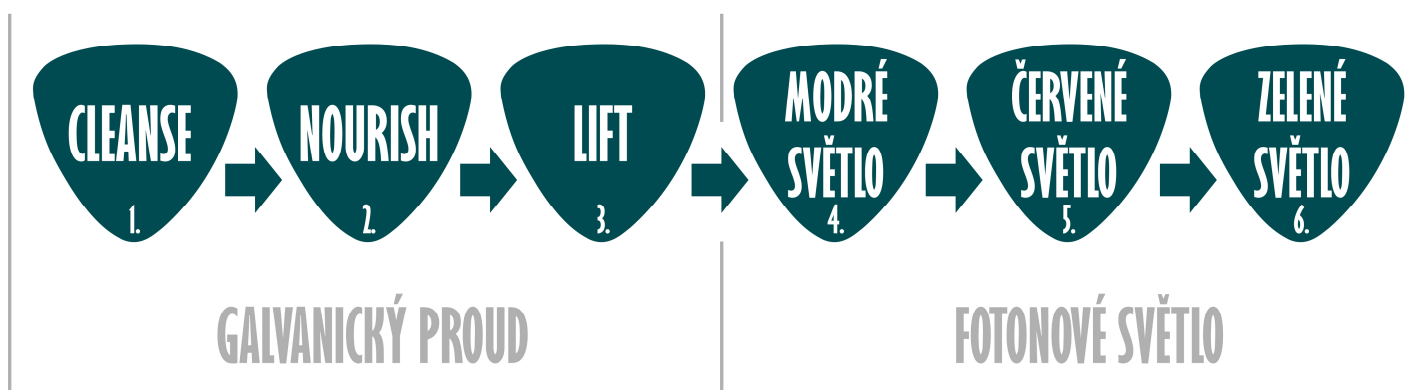

JEDNOTLIVÉ KROKY OŠETŘENÍ PLETI

Použití jednotlivých aplikátorů a funkcí si můžete postupně upravit s tím, jak si rutinní používání přístroje osvojíte. Použití galvanického proudu má tři jednotlivé režimy (cleanse, nourish, lift) a ošetření by nemělo přesahovat délku 12 minut. Zde je několik doporučení, ze kterých můžete vycházet.

POZNÁMKY KE GALVANICKÉMU PROUDU

- Pomocí tlačítka galvanického proudu si můžete kdykoliv přepnout mezi jednotlivými režimy (cleanse, nourish, lift).
- Pomocí tlačítka LEVEL můžete kdykoliv upravit sílu působení galvanického proudu. K dispozici jsou celkem tři úrovně: nízká, střední, vysoká. Doporučujeme vždy začít o nejnižší úrovně a postupně navyšovat pocitově.
- Přístroj se přepne automaticky do režimu STANDBY po uplynutí 4 minut od zahájení ošetření pleti. Po uplynutí dalších 4 minut v režimu STANDBY se přístroj automaticky vypne.
- Vždy se ujistěte, že při kontaktu aplikační hlavice s pletí je váš ukazováček v kontaktu s vodící oválnou elektrodou. V opačném případě nebude galvanický proud působit.
- Při pohybu aplikační hlavicí po pleti příliš netlačte. Rovněž se nemusíte pohybovat příliš rychle. Optimální je ošetření připomínající „razítkování“.
- Během použití galvanického proudu můžete cítit jemné mravenčení. Jedná se o průvodní jev galvanického proudu. Výkon je přesně optimalizován tak, aby vás neporanol, ale zároveň měl na pleť příznivé účinky.

KROK 1: ČIŠTĚNÍ PLETI - CLEANSE

1. Ujistěte se, že je nasazena aplikační hlavice pro působení galvanického proudu.
2. Pleť odličte běžným způsobem. Hlavním účelem je zbavit pleť zbytků makeupu.
3. Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF (zapnutí je doprovázeno dlouhým pípnutím a rozsvítí se červená kontrolka).
4. Stiskněte tlačítko CLEANSE.
5. Naneste na pleť tenkou vrstvu čírého vodivého sonogelu.
6. Aplikační hlavicí se pohybujte v kruživých pohybech nebo tzv. razítkováním na problematických partiích obličeje.
7. Program se automaticky vypne po 4 minutách.
8. Po skončení a přechod na 2. krok NOURISH pleť otřete od zbytků sonogelu.

KROK 2: OBNOVA - NOURISH

1. Naneste na pleť tenkou vrstvu vyživujícího séra nebo hydratačního gelu. Dbejte na to, aby byla pokryta pečlivě pleť v souvislé vrstvě.
2. Stiskněte tlačítko NOURISH.
3. Aplikační hlavicí se pohybujte v kruživých pohybech nebo tzv. razítkováním na problematických partiích obličeje.
4. Snažte se vyhnout místům s velmi tenkou vrstvou pleti (oblast spánků, oblast těsně kolem očí).
5. Program se automaticky vypne po 4 minutách.
6. Po skončení a přechod na 3. krok LIFT pleť ponechejte pleť hydratovanou. Nevysoušejte.

KROK 3: LIFTING - LIFT

1. Stiskněte tlačítko LIFT.
2. Aplikační hlavici se pohybujte v kruživých pohybech nebo tzv. razítkováním na problematických partiích obličeje.
3. Snažte se vyhnout místům s velmi tenkou vrstvou pleti (oblast spánků, oblast těsně kolem očí).
4. Program se automaticky vypne po 4 minutách.
5. Jakmile dokončíte ošetření pleti galvanickým proudem, můžete zahájit ošetření pomocí fotonového světla.

POZNÁMKY K FOTONOVÉ TERAPII

- Ošetřit pleť pomocí fotonového světla můžete pouze samostatně bez působení galvanického proudu.
- Přestože netrpíte negativními příznaky akné pleti, můžete využívat aplikátor s modrým světlem s preventivních důvodů s antibakteriálními účinky.
- Optimální délka ošetření fotonovým světlem se pohybuje mezi 20 až 25 minutami.
- Aplikační hlavice s fotonovým světlem jsou vybaveny kontaktním senzorem. Fotonové světlo se spustí automaticky při kontaktu aplikátoru s pleť.
- Při použití aplikátoru s fotonovým světlem není třeba mít prst na kontaktní ovál na zadní straně přístroje.
- Aplikátor s fotonovým světlem držte v kontaktu s pleť na jednom místě ne déle než 3 minuty.
- Není doporučeno se s aplikátorem s fotonovým světlem po pleti pohybovat. Vždy se snažte zůstat na jednom místě.
- V okamžiku, kdy aplikátor ztratí kontakt s pleť, světlo zhasne. Časovač se resetuje. Znovu se zahájí odpočítávání 3 minut.

KROK 4: MODRÉ SVĚTLO

1. Nasadte na přístroj aplikátor s modrým světlem.
2. Stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF (zapnutí je doprovázeno dlouhým pípnutím a rozsvítí se červená kontrolka).
3. Stiskněte tlačítko PHOTOFACIAL. Nyní je přístroj připraven k použití.
4. Aplikátor přiložte na pleť. Ponechte na jednom místě bez pohybu v délce alespoň 3 minut.
5. Poté se přesuňte na další místo obličeje tak, abyste tímto způsobem pokryli celý obličej.
6. Optimální je opakování 5x až 6x po 3 minutách.

KROK 5: ČERVENÉ SVĚTLO

1. Nasadte na přístroj aplikátor s červeným světlem.
2. Stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF (zapnutí je doprovázeno dlouhým pípnutím a rozsvítí se červená kontrolka).
3. Stiskněte tlačítko PHOTOFACIAL. Nyní je přístroj připraven k použití.
4. Aplikátor přiložte na pleť. Ponechte na jednom místě bez pohybu v délce alespoň 3 minut.
5. Poté se přesuňte na další místo obličeje tak, abyste tímto způsobem pokryli celý obličej.
6. Optimální je opakování 5x až 6x po 3 minutách.

KROK 6: ZELENÉ SVĚTLO

1. Nasadte na přístroj aplikátor se zeleným světlem.
2. Stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF (zapnutí je doprovázeno dlouhým pípnutím a rozsvítí se červená kontrolka).
3. Stiskněte tlačítko PHOTOFACIAL. Nyní je přístroj připraven k použití.
4. Aplikátor přiložte na pleť. Ponechte na jednom místě bez pohybu v délce alespoň 3 minut.
5. Poté se přesuňte na další místo obličeje tak, abyste tímto způsobem pokryli celý obličej.
6. Optimální je opakování 5x až 6x po 3 minutách.



METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

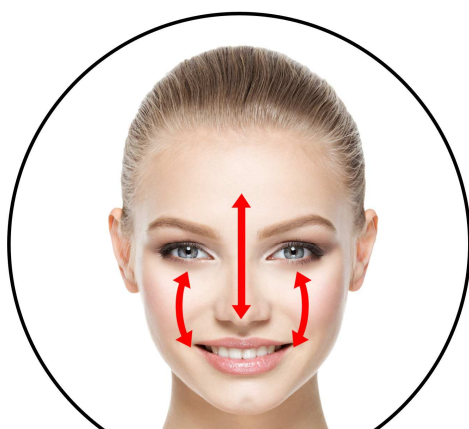

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

Poznámka: Při ošetření se snažte, aby byla aplikační hlavice co nejvíce v kontaktu s pletí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Diody fotonové terapie svítí pouze, jsou-li v kontaktu s pletí.



Pokud nejsou v kontaktu s pokožkou, nesvítí.

DBEJTE PŘI KAŽDÉM POUŽITÍ

Pro ošetření pleti galvanickým proudem musí být velká aplikační hlavice v kontaktu s pletí a uživatel se musí současně dotýkat prstem (např. ukazováčkem) vodící oválné elektrody na zadní straně přístroje. V opačném případě nebude přístroj galvanický proud generovat.

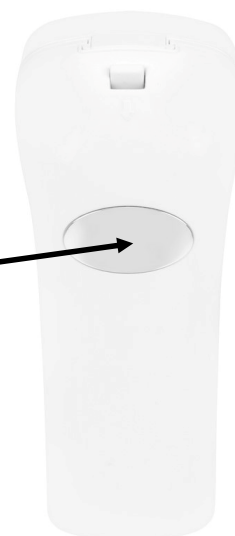

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč je výrazný cenový rozdíl přístrojů v kosmetických salonech a přístrojích pro domácí použití?

Hlavním důvodem je rozdílná frekvence používání. Přístroje v kosmetických salonech musí být schopné pracovat nepřetržitě od rána do večera. Tím je kladena zvýšená náročnost na použité materiály a celkovou technologickou koncepci (větší zdroje napájení, větší míra chlazení, atd.) Výkon kosmetických přístrojů pro domácí použití je navržen tak, aby uživateli splnil avizované benefity. Vyšší frekvence použití = dražší výrobní náklady.

Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavičky?

Po skončení ošetření mohou na aplikační hlavičce ulpět mikroskopické částičky kůže. Očištěním zabráníte jednak jejich případnému vniknutí do přístroje a zajistíte především hygienu provozu.

Jak často mohu přístroj používat?

Vždy záleží na intenzitě, kterou pleť ošetřujete v režimu galvanického proudu. Je třeba si uvědomit, že při použití vyššího výkonu potřebuje pleť určitý čas na mírnou rekonvalescenci. Přístroj pleť mírně vysušuje. Po každé aplikaci použijte nejlépe ještě hydratační krém nebo mast, aby byla pokožka stále hydratovaná.

Existují nějaké kontraindikace? (situace, kdy nelze přístroj používat)

Přístroj BR-1030 je určen pro všechny typy pleti bez věkového omezení uživatele. Přístroj není vhodné používat, pokud trpí uživatel vážným kožním onemocněním. Viz. seznam kontraindikací v úvodu návodu.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Nikoliv. Přístroj neslouží pro léčbu závažných kožních onemocnění. Přístroj NELEČÍ: aktinickou keratózu, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitidu lupénku.

Jak postupovat, když baterie ztratí po delší době kapacitu?

Pokud se postupem času kapacita baterie výrazně sníží, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz Zašleme informace, jakým způsobem lze výměnu baterie řešit.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj má standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: rma@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Kde se přístroj vyrábí?

Přístroj si necháváme vyrábět v Číně dle našich požadavků a specifikací. Garantujeme standardní záruční i pozáruční servis.

Může přístroj používat více osob?

Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce aplikační hlavičky, druhá osoba přístroj použít může.

Jaké kosmetické přípravky kombinovat během ošetření přístrojem BR-1030?

Používat můžete jakékoliv vámi oblíbené krémy a séra. Vždy však dbejte na to, aby nevnikly do přístroje.

Jaké části těla lze přístrojem ošetřit?

Přístroj je určen pro ošetření oblasti obličeje a krku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek

Galvanická žehlička s fotonovým světlem

uvedený na trh pod modelovým označením BR-1030 EAN: 8594166100503
spadající do skupiny produktů obchodní značky BeautyRelax

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009 + A2: 2011

EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001 + A2: 2008

Kladný výsledek testu je popsán v Test Reportu číslo: EESZE10160036

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS).
Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, kadmium, a další toxické látky.



Pro bezpečné používání je nezbytné přesně postupovat dle pokynů uvedených
v návodu k obsluze, který je součástí balení.

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Místo vydání: Brno
Datum vydání: 5.11.2013

.....
Martin Hrbek
jednatel