

# NÁVOD K OBSLUZE

Galvanická žehlička pro ošetření pleti

## BR-1150





## OBSAH:

ÚVODEM	4
SPECIFIKACE	4
UPOZORNĚNÍ	5
OBSAH BALENÍ	5
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	6
FOTONOVÁ TERAPIE	7
IONIZACE – GALVANICKÝ PROUD	9
VIBRAČNÍ MASÁŽ	10
POPIS PŘÍSTROJE	11
POPIS TLAČÍTEK	12
POPIS DISPLEJE	12
NASTAVENÍ FUNKCÍ PŘÍSTROJE	13
KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ	14
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	15
ELIMINACE PIGMENTOVÝCH SKVRN	17
OŠETŘENÍ AKNÓZNÍ PLETI	17
OŠETŘENÍ TMAVÝCH KRUHŮ POD OČIMA	18
OŠETŘENÍ CITLIVÉ PLETI	18
JAKÝCH VÝSLEDKŮ MŮŽETE DOCÍLIT	18
NABÍJENÍ BATERIE	19
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	19
TECHNICKÉ PARAMETRY	19
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	20
DOVOZCE	20
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	21

# ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pročtěte si prosím před prvním použitím pečlivě tento návod k obsluze a uchovejte si jej pro případné pozdější použití.

Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-1150 bude hýčkat vaši pleť hned několika technologiemi: ultrazvukovými vlnami, fotonovou terapií, ionizací a navíc příjemnou vysokofrekvenční mechanickou masáží. A to vše účinně, bezbolestně, neinvazivně!


## **Technologie ošetření přístrojem BR-1150(W):**

1. Ultrazvukové vlny.
2. Fotonová terapie.
3. Ionizace (galvanický proud).
4. Vysokofrekvenční mechanická masáž.

## **SPECIFIKACE**

- Technologie ultrazvukových vln o frekvenci 3MHz.
- Tři světelné režimy fotonové terapie: červená, modrá a zelená.
- Vysokofrekvenční mechanická masáž.
- Aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli.
- Používání je naprosto bezpečné a bezbolestné.
- Šetrný k pokožce.
- Vhodný pro všechny typy pleti.
- Snadné ovládání pomocí tlačítek na těle přístroje.
- Kompaktní, malý a lehký.
- Přístroj je určen pro všechny typy pleti.

## specifický výkon a frekvence ultrazvukových vln

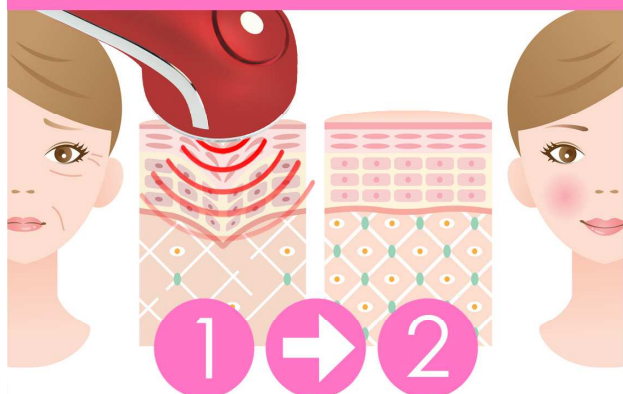

### **1 výchozí stav**

pleť je povadlá  
působí unaveným dojmem  
vykazuje známky stárnutí

### **2 dosažitelné výsledky**

nastartování procesů ve vrstvě dermis  
remodelace kolagenových vláken a elastinu  
vyhlazení povislých a deformovaných kontur

neinvazivně ● bezpečně ● bezbolestně ● šetrně

# UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenesí distributor odpovědnost.



# OBSAH BALENÍ

- Galvanická žehlička pro ošetření pleti.
- Napájecí USB kabel.
- Ochranné textilní brýle.
- Návod k obsluze.

## ULTRAZVUKOVÉ VLNY

Aplikátor z ušlechtilé oceli po přiložení na ošetřovanou oblast uvolňuje energii se specifickým výkonem a frekvencí 3MHz. Hodnoty jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.



### **Hlavní výhody**

- Zcela neinvazivní charakter ošetření.
- Bezpečné, bezbolestné a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Účinné na povadlou a nezdravě vyhlížející pleť.
- Pleť má omlazený a prozářený vzhled.


### **Poznámka:**

Při používání funkce ultrazvukových vln vždy použijte čirý vodivý gel, který zakoupíte ve všech prodejnách zdravotnických potřeb. Před použitím naneste jemnou vrstvu na hlavici přístroje. Gel zlepšuje vodivost a celkový přenos vln z hlavičky do pokožky. Po ukončení ošetření aplikační hlavici pečlivě očistěte suchým hadříkem (nepoužívejte žádné agresivní čisticí přípravky či roztoky).



## FOTONOVÁ TERAPIE

Terapie světlem patří mezi nejstarší metody, které napomáhají v boji proti rozličným kožním defektům. Fotonová terapie využívá přirozené světelné vlny, které generují LED diody. Vlny ve specifických délkách jsou předávány do kůže. Světlo proniká do těla jako proud energie (ve formě fotonů), která je vstřebávána jednotlivými složkami kůže. Různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Model BR-1150 kombinuje 3 druhy světél (červené, modré, zelené).

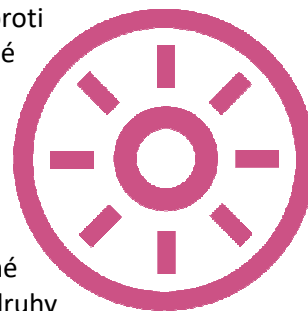

### **ČERVENÉ SVĚTLO (vlnová délka 625nm)**


- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků.
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni.
- Brání v tvorbě pigmentu.

### **MODRÉ SVĚTLO (vlnová délka 465nm)**

- Aktivuje porfyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie).
- Antibakteriální a protizánětlivý účinek.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Bezpečné a efektivní ošetření.

### **ZELENÉ SVĚTLO (vlnová délka 525nm)**


- Přispívá k eliminaci epidermálních pigmentových skvrn.
- Zpomaluje produkci melaninu o 40 až 60%.
- Vyrovnává barevný tonus pokožky.
- Protizánětlivý účinek.
- Vhodný pro všechny typy pleti.

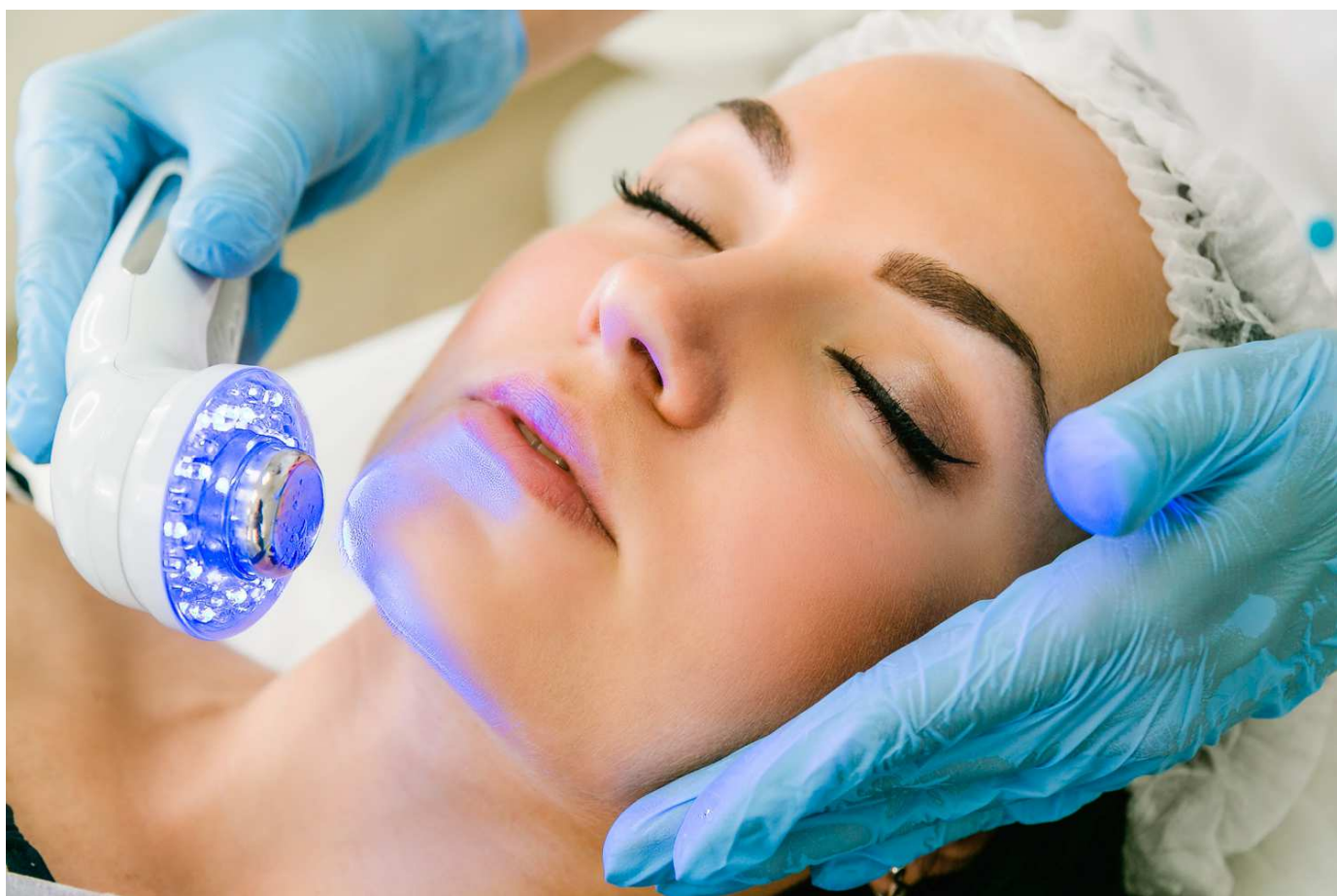



# IONIZACE – GALVANICKÝ PROUD

Ionizace je proces, během kterého pronikají ionty přímo do jednotlivých vrstev pokožky. Dochází k uvolnění kožních pórů. Působením iontů získávají buňky lepší schopnost absorbovat výživové látky z krémů, masek a sér hlouběji do pokožky. Ošetření je vhodné pro suchou, mastnou i citlivou pleť. Nespornou výhodou působení iontů je lepší přirozené absorbování vlhkosti.

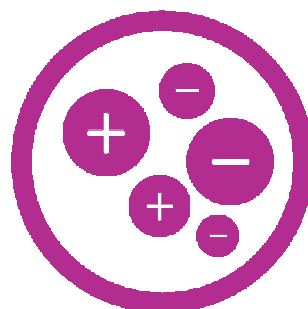

## **NEGATIVNÍ IONTY**

Fádní, unaveně vypadající pleť.  
Známky stresu.  
Otoky.

## **KLADNÉ IONTY**

Důkladné vyčištění pleti.  
Tmavé skvrny v oblasti očí.  
Ulpívající nečistoty v pokožce.

## **PROČ NEGATIVNÍ IONTY?**


Násobně zvyšuje schopnost absorbovat výživové látky z krémů, masek a sér hlouběji do pokožky.  
Celkově osvěžuje pleť, uvolňuje svalovou tkáň a působí antimikrobiálně.

## **PROČ KLADNÉ IONTY?**


Přispívá k obnově kolagenových vláken.  
Pomáhá k důkladnému čištění.

## VIBRAČNÍ MASÁŽ

Aplikační hlavice má funkci vysokofrekvenční mechanické masáže. Generuje jemné kmity s frekvencí 12 000 kmitů/sekundu. Hlavní účinek je zlepšení krevního oběhu prostřednictvím stimulace lymfatického systému obličeje. Výsledkem je hladší, svěží pleť. Lepší tonus (pleť je barevně jednotnější). Zároveň dochází k mechanické stimulaci kolagenních a elastických vláken.

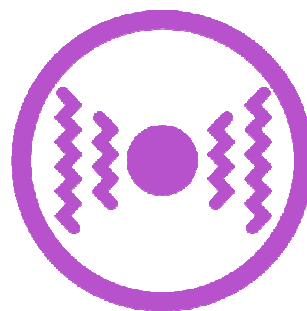

# POPIS PŘÍSTROJE

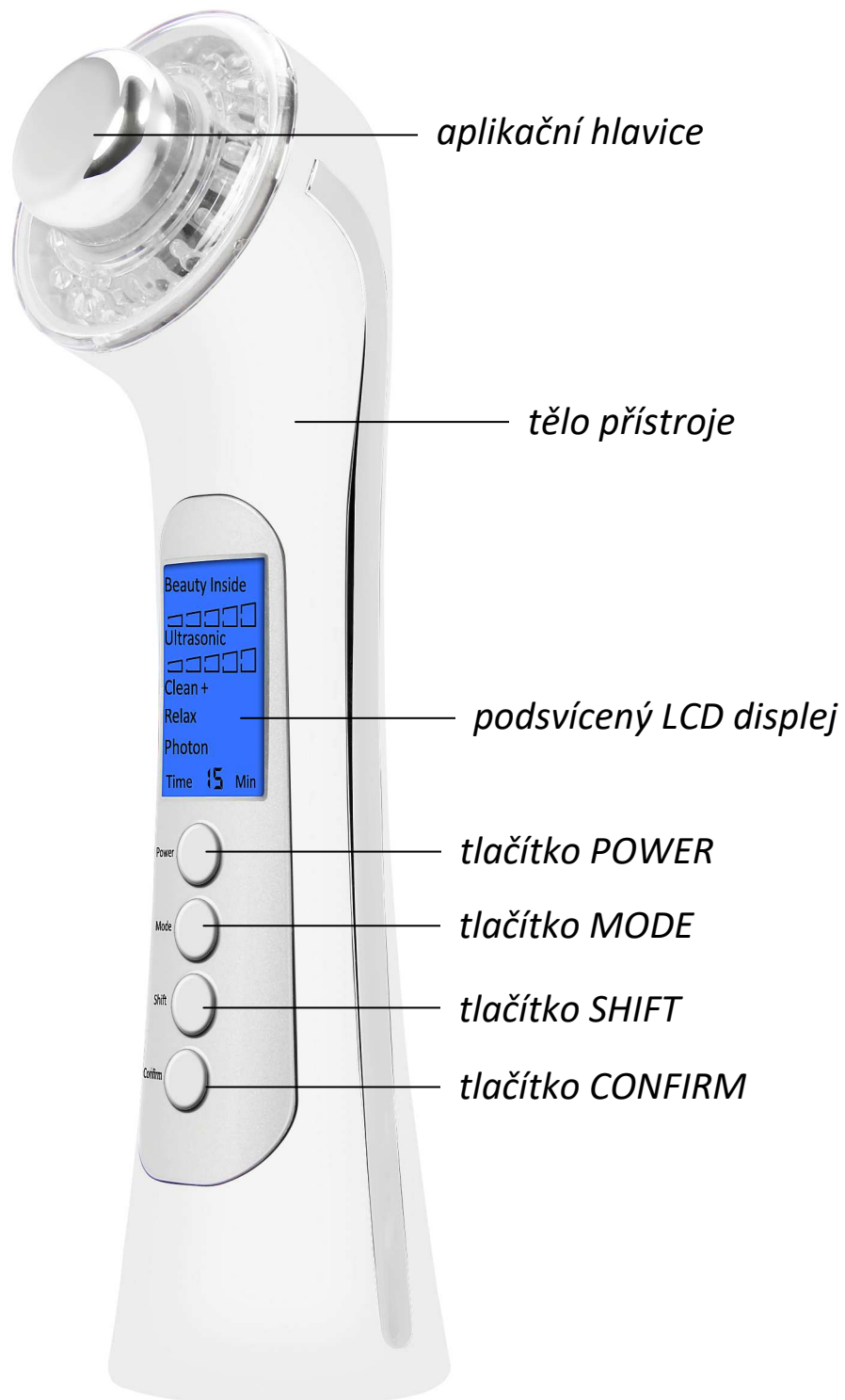

# POPIS TLAČÍTEK

## **POWER**

Tlačítko POWER slouží jako tlačítko ON/OFF pro zapnutí a vypnutí přístroje. Přístroj můžete pomocí tlačítka POWER kdykoliv během činnosti ihned vypnout.

## **MODE**

Tlačítko mode slouží k přepínání mezi jednotlivými funkcemi. Výběr funkce vždy potvrzuje blikání názvu funkce (Ultrasonic, Clean +, Nutri -, Relax, Photon, Time). Pokud žádnou funkci nenastavíte, přístroj se automaticky po uplynutí 1 minuty vypne.


## **SHIFT**

Tlačítko SHIFT slouží pro nastavení úrovně a intenzity vybraných funkcí. U funkce vibrací si můžete vybrat přerušovaný nebo kontinuální režim.

## **CONFIRM**

Jakmile dokončíte nastavení všech funkcí, činnost přístroje zahájíte stisknutím tlačítka CONFIRM. Tlačítko CONFIRM funguje rovněž jako tlačítko START/PAUSE. Činnost přístroje můžete pozastavit a dále v ní pokračovat právě pomocí tlačítka CONFIRM.

# POPIS DISPLEJE

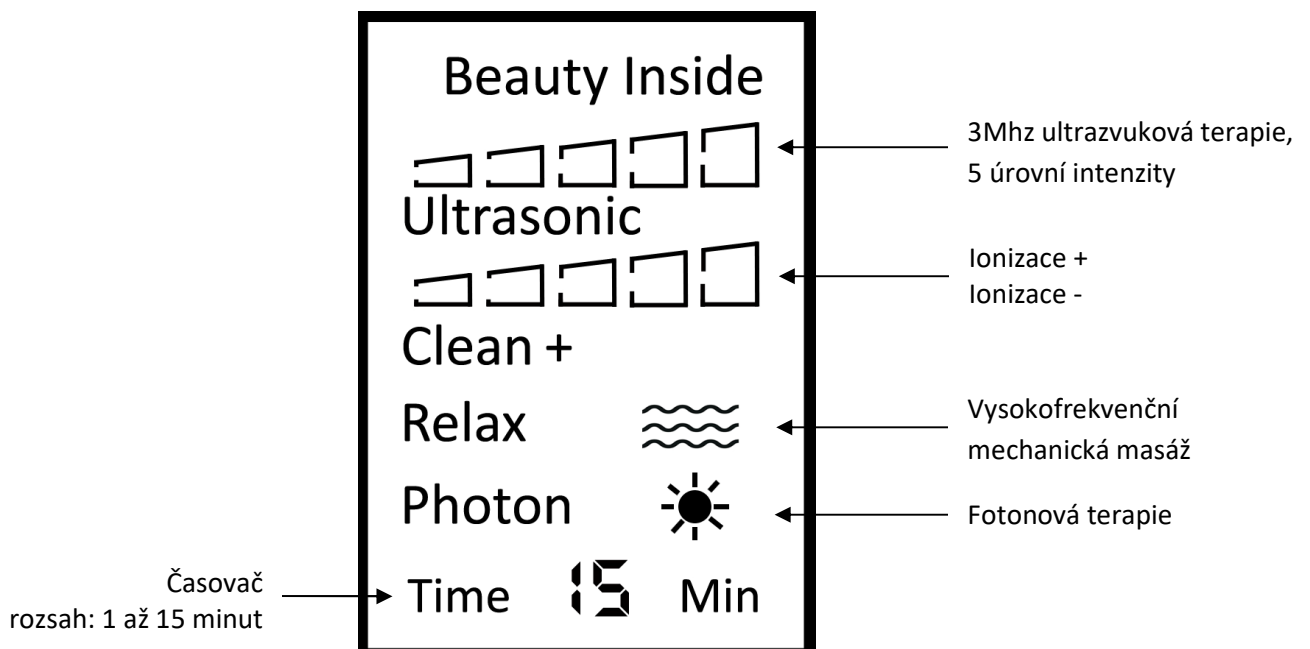

# **NASTAVENÍ FUNKCÍ PŘÍSTROJE**

Nyní vám popíšeme, jakým způsobem si nastavit jednotlivé funkce přístroje. Vždy se vychází z výchozího pohotovostního stavu, který nastane po zapnutí přístroje pomocí stisku tlačítka POWER.

## **ULTRAZVUKOVÉ VLNY**

- 1) Stiskněte 1x tlačítko MODE (text "Ultrasonic" začne blikat).
- 2) Pomocí tlačítka SHIFT si nastavte úroveň ultrazvukových vln. K dispozici je rozsah od 1 do 5.
- 3) Stiskněte 1x tlačítko CONFIRM. Hlavice začne generovat ultrazvukové vlny a můžete začít s ošetřením pleti. Zapnutou funkci ultrazvukových vln signalizuje blikání signalizace úrovně vln.
- 4) Stiskněte 6x tlačítko MODE. Pomocí tlačítka SHIFT si můžete nastavit délku ošetření v rozsahu od 1 do 15 minut.
- 5) Stiskněte 1x tlačítko CONFIRM. Funkce ultrazvukových vln bude spuštěna po dobu, kterou jste si nastavili.
- 6) Zapnutí funkce ultrazvukových vln je doprovázeno jemným pípáním v intervalu přibližně 4 sekund.
- 7) Tuto funkci můžete kdykoliv pozastavit/spustit tlačítkem CONFIRM.
- 8) Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne.

### **Poznámka:**

Při používání funkce ultrazvukových vln vždy použijte čirý vodivý gel, který zakoupíte ve všech prodejnách zdravotnických potřeb. Před použitím naneste jemnou vrstvu na hlavici přístroje. Gel zlepšuje vodivost a celkový přenos vln z hlavice do pokožky. Po ukončení ošetření aplikační hlavici pečlivě očistěte suchým hadříkem (nepoužívejte žádné agresivní čisticí přípravky či roztoky).

### **Info:**

Výskyt ultrazvukových vln ověříte jednoduchým způsobem. Při zapnuté funkci ultrazvukových vln naneste na aplikační hlavici dvě až tři malé kapky vody. Takto nanesený vzorek vody je ultrazvukovými vlnami okamžitě rozkmitán.

## **FOTONOVÁ TERAPIE**

!!! Upozornění !!! Než začnete nastavovat funkci fotonové terapie, použijte ochranné textilní brýle, které jsou součástí balení.

- 1) Stiskněte 5x tlačítko MODE (text "Photon" začne blikat).
- 2) Pomocí tlačítka SHIFT si nastavte barvu fotonové terapie: červená, modrá, zelená.
- 3) Stiskněte 1x tlačítko CONFIRM. Hlavice začne produkovat fotonové světlo a můžete začít s ošetřením pleti.
- 4) Stiskněte 1x tlačítko MODE. Pomocí tlačítka SHIFT si můžete nastavit délku ošetření v rozsahu od 1 do 15 minut.
- 5) Stiskněte 1x tlačítko CONFIRM. Funkce fotonové terapie bude spuštěna po dobu, kterou jste si nastavili.
- 6) Zapnutí funkce fotonové terapie je doprovázeno jemným pípáním v intervalu přibližně 4 sekund.
- 7) Tuto funkci můžete kdykoliv pozastavit/spustit tlačítkem CONFIRM.
- 8) Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne.

## **IONIZACE (GALVANICKÝ PROUD)**

### **KLADNÉ IONTY**

- 1) Stiskněte 2x tlačítko MODE (text "Clean +" začne blikat).
- 2) Pomocí tlačítka SHIFT si nastavte úroveň ionizace. K dispozici je rozsah od 1 do 5.
- 3) Stiskněte 1x tlačítko CONFIRM. Hlavice přístroje začne generovat pozitivní ionty a můžete začít s ošetřením pleti.
- 4) Stiskněte 4x tlačítko MODE. Pomocí tlačítka SHIFT si můžete nastavit délku ošetření v rozsahu od 1 do 15 minut.
- 5) Stiskněte 1x tlačítko CONFIRM. Funkce ionizace bude spuštěna po dobu, kterou jste si nastavili.
- 6) Zapnutí funkce ionizace terapie je doprovázeno jemným pípáním v intervalu přibližně 4 sekund.
- 7) Tuto funkci můžete kdykoliv pozastavit/spustit tlačítkem CONFIRM.
- 8) Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne.

### **ZÁPORNÉ IONTY**

- 1) Stiskněte 3x tlačítko MODE (text "Nutri -" začne blikat).
- 2) Pomocí tlačítka SHIFT si nastavte úroveň ionizace. K dispozici je rozsah od 1 do 5.
- 3) Stiskněte 1x tlačítko CONFIRM. Hlavice přístroje začne generovat negativní ionty a můžete začít s ošetřením pleti.
- 4) Stiskněte 3x tlačítko MODE. Pomocí tlačítka SHIFT si můžete nastavit délku ošetření v rozsahu od 1 do 15 minut.
- 5) Stiskněte 1x tlačítko CONFIRM. Funkce ionizace bude spuštěna po dobu, kterou jste si nastavili.
- 6) Zapnutí funkce ionizace terapie je doprovázeno jemným pípáním v intervalu přibližně 4 sekund.
- 7) Tuto funkci můžete kdykoliv pozastavit/spustit tlačítkem CONFIRM.
- 8) Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne.

## **VYSOKOFREKVENČNÍ MECHANICKÁ MASÁŽ**

Přístroj nabízí dva režimy vibrační masáže. Přerušovaná a kontinuální.

- 1) Stiskněte 4x tlačítko MODE (text "Relax" začne blikat).
- 2) Pomocí tlačítka SHIFT si nastavte přerušovanou nebo kontinuální masáž.  
Přerušovaná (vlnky jsou čárkované) Kontinuální (vlnky jsou celistvé).
- 3) Stiskněte 1x tlačítko CONFIRM. Hlavice přístroje začne vibrovat a můžete začít s ošetřením pleti.
- 4) Stiskněte 6x tlačítko MODE. Pomocí tlačítka SHIFT si můžete nastavit délku ošetření v rozsahu od 1 do 15 minut.
- 5) Stiskněte 1x tlačítko CONFIRM. Funkce vibrací bude spuštěna po dobu, kterou jste si nastavili.
- 6) Zapnutí funkce vibrace je doprovázeno jemným pípáním v intervalu přibližně 4 sekund.
- 7) Tuto funkci můžete kdykoliv pozastavit/spustit tlačítkem CONFIRM.
- 8) Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne.

## **KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ**

Všechny výše uvedené funkce můžete libovolně kombinovat. V praxi to znamená, že můžete pleť ošetřovat v jeden moment jednou nebo všemi funkcemi. Při nastavení funkcí platí následující pravidla:

- 1) Pomocí tlačítka MODE můžete přepínat mezi jednotlivými funkcemi.
- 2) Pomocí tlačítka SHIFT můžete nastavit úrovně nebo intenzity funkcí.

Pomocí tlačítek MODE a SHIFT si nastavte všechny funkce, které mají být během ošetření spuštěny. Pokud je ukazatel funkce na nule (políčko není vyplněno), funkce není připravena ke spuštění. Jakmile vše nastavíte včetně času, stiskněte tlačítko CONFIRM. Spustí se tím funkce, které jste si v předchozím kroku aktivovali.

# METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

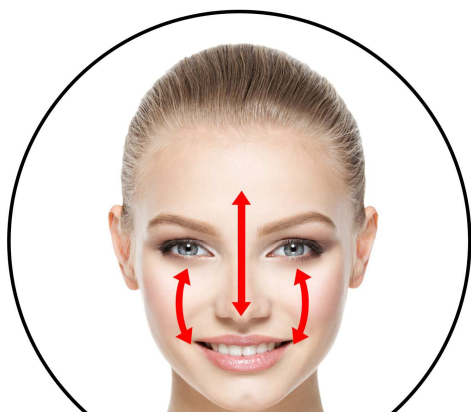

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



**Krk:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

## **Poznámka:**

Při ošetření se snažte, aby byla aplikační hlavice co nejvíce v kontaktu s pletí.

Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme pleť ošetřit přístrojem ne déle jak 30 minut přibližně 3x týdně.

### **Krok 1: Hlubkové čištění**

1. Zvolte funkci ionizace [Clean +] & ultrazvukové vlny [Ultrasound] & vibrační masáž [Relax]. Zvolte vhodnou intenzitu, která vám bude komfortní.
2. Pomocí vatového tampónku odstraňte všechny zbytky vlhkosti pleti. Nyní můžete zahájit přístrojové ošetření pleti. Optimální čas 8 až 10 minut. Aplikační hlavici se pohybujte po pleti pomalu. Po přístrojovém ošetření omyjte pleť vodou pro dokončení procesu čištění.

### **Krok 2: Zlepšení absorbování výživových látek ze sér a přípravků**

1. Zvolte funkci ionizace [Nutri -] & ultrazvukové vlny [Ultrasound] & vibrační masáž [Relax]. Zvolte vhodnou intenzitu, která vám bude komfortní.
2. V tomto kroku můžete kombinovat přístrojové ošetření s následujícími kosmetickými přípravky: tonizující pleťová voda, vyživující přípravky, esenciální olej, aloe vera gel, ...)  
Optimální čas 8 až 10 minut. Aplikační hlavici se pohybujte po pleti pomalu.

### **Krok 3: Fotonová terapie**

1. Zvolte si funkci fotonové terapie [Photon] a vyberte barvu dle vaší potřeby.

#### **ČERVENÉ SVĚTLO (vlnová délka 625nm)**

Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu. Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků. Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni. Brání v tvorbě pigmentu.

#### **MODRÉ SVĚTLO (vlnová délka 465nm)**

Aktivuje porphyryny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie). Antibakteriální a protizánětlivý účinek. Prevence proti tvorbě akné. Bezpečné a efektivní ošetření.

#### **ZELENÉ SVĚTLO (vlnová délka 525nm)**

Přispívá k eliminaci epidermálních pigmentových skvrn. Zpomaluje produkci melaninu o 40 až 60%. Vyrovnává barevný tonus pokožky. Protizánětlivý účinek. Vhodný pro všechny typy pleti.

2. Optimální čas 8 až 10 minut. Aplikační hlavici se pohybujte po pleti pomalu.

### **Krok 4: Relaxace a podpoření krevního oběhu**

1. Zvolte funkci vibrační masáže [Relax]. Zvolte přerušovanou nebo kontinuální režim. Aplikační hlavici přiložte na pleť. Přibližně po 10 vteřinách přesuňte hlavici o kousek dále. Takto postupujte tzv. bodovým pohybem po celém obličejí. Hlavici se pohybujte na pleti po místech, kde je vám ošetření vibracemi příjemné.
2. Optimální čas 8 až 10 minut.  
Tento typ ošetření je ideální jako závěrečný krok ošetření pleti. Pleť relaxuje, uvolní se zatuhlá jemná svaly a podpoří se lymfatický systém obličejí.



# ELIMINACE PIGMENTOVÝCH SKVRN

*Četnost opakování: každý druhý den*

## **Krok 1:**

Hlubkové intenzivní čištění pleti (stejným způsobem, jako v předchozím odstavci).

## **Krok 2:**

Zlepšení absorbování výživových látek (stejným způsobem, jako v předchozím odstavci).

## **Krok 3:**

Fotonová terapie (vyberte červené a zelené světlo). Vždy použijte ochranné textilní brýle!!  
Každá barva v délce 10 až 15 minut.

# OŠETŘENÍ AKNÓZNÍ PLETI

*Četnost opakování: každý večer*

## **Krok 1:**

Vyčistěte pleť. Použijte funkci ultrazvukových vln a vyberte vhodnou intenzitu. Ultrazvukem ošetřete pleť v délce 5 minut. Omyjte pleť vodou a vysušte.

## **Krok 2:**

Použijte funkci ultrazvukových vln v kombinaci s fotonovým světlem (modré světlo). Vždy použijte ochranné textilní brýle!!  
Doporučený čas: 10 až 15 minut.

## **Krok 3:**

Použijte funkci ultrazvukových vln v kombinaci s vibracemi dle potřeby. Zvolte přerušovaný nebo kontinuální režim. Doporučený čas: 5 minut.

**Poznámka:** Použití funkce ultrazvukových vln a vibrací může způsobit mírné zahřátí pleti. Tento stav je naprosto normální a není třeba se obávat. Aplikační hlavici se během ošetření pleti pohybujte po pleti pomalu. Na přístroj příliš netlačte.

# OŠETŘENÍ TMAVÝCH KRUHŮ POD OČIMA

*Četnost opakování: jednou týdně*

## **Krok 1:**

Hloubkové intenzivní čištění pleti (stejným způsobem, jako v předchozím odstavci). Zaměřte se zejména na oblast kolem očí. Pleť omyjte pečlivě vodou a vysušte.

## **Krok 2:**

Zvolte funkci ultrazvukových vln a nastavte velmi jemnou intenzitu (úroveň 1, maximálně 2). Přidejte funkci fotonové terapie (červené nebo modré světlo). Doporučený čas: 10 minut. Vždy použijte ochranné textilní brýle!!).

## **Krok 3:**

Zvolte funkci vibrací. Nastavte si přerušovaný nebo kontinuální režim podle toho, který vám bude nejlépe vyhovovat. Aplikační hlavici se pohybujte v oblasti kolem očí. Doporučený čas: 5 minut.

# OŠETŘENÍ CITLIVÉ PLETI

*Četnost opakování: jednou týdně*

1. Zvolte funkci ultrazvukových vln.
2. Zvolte funkci fotonové terapie (zelené a modré světlo). Doporučený čas pro každé světlo: 10 minut.

!!! Upozornění !!! Než začnete nastavovat funkci fotonové terapie, použijte ochranné textilní brýle, které jsou součástí balení.

# JAKÝCH VÝSLEDKŮ MŮŽETE DOCÍLIT

Po dokončení ošetření může pleť mírně zarudnout. Zarudnutí je způsobeno rozšířením krevních cév a zvýšeným prokrvením. V některých případech se mohou objevit i mírné otoky, což způsobuje zejména výskyt více tekutiny na konkrétních místech, než na ostatních místech. Tyto příznaky však znamenají, že jste dosáhli požadovaného cíle. Všechny tyto na první pohled negativní příznaky zmizí pozvolna krátce po dokončení ošetření.

Výsledkem ošetření bude viditelné zlepšení pružnosti a textury pleti. Pleť bude hladší a zjemní se přechody v hrubších oblastech pokožky. Ošetřená oblast pleti bude mít výrazně jemnější mimické a vějířkovité vrásky. Výsledky závisí především na dodržování všech kroků ošetření pleti a typu vaší pleti.

Klinické studie prokázaly, že se u sledovaných uživatelů přístroje prokázalo snížení jemných linek o 30% a 16% výraznějších vrásek v období 4 týdnů. Celkově se kvalita pleti výrazně zlepšila jak vizuálně, tak i na dotek. Výsledky se lišily v závislosti na individuálních vlastnostech pleti, věku a pohlaví uživatele.

## NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou interní nabíjecí baterii typu Li-ion 1150mAh. Nabíjí se pomocí kabelu, který je součástí balení. Vždy se ujistěte, že kabel není poškozený. Pro nabíjení používejte USB port počítače nebo notebooku.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Tímto přípravkem čistěte výhradně nerezovou aplikační hlavici. Dbejte na to, aby vlhkost nevnikla do přístroje.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence: 3 MHz.
- Vlnová délka červeného světla: 625 nm.
- Vlnová délka modrého světla: 465 nm.
- Vlnová délka zeleného světla: 525 nm.
- Fotonovou terapii zajišťují výkonné LED diody.
- Součástí balení jsou ochranné textilní brýle (v režimu fotonové terapie).
- Rozměry: 5x17x5 cm.
- Hmotnost: 165 g.
- Baterie: zabudovaná Li-ion 1150mAh.
- Napájení: USB kabelem.



# LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

## DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o. | Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

Kontaktní email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s názvem

## **Kosmetický přístroj pro ošetření pleti**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1150 / BR-1150W**

EAN: **8594166103306; 8594166103764**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN 60601-1-2:2015**

**EN 61000-3-2:2014**

**EN 61000-3-3:2013**

**EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014**

**EN 62471:2008**

**Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: ENC170811GZ57E1;**

**ENC170811GZ57L1**

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 10.1.2018