

NÁVOD K OBSLUZE

Galvanická žehlička pro ošetření pleti

BR-1150



OBSAH:

ÚVODEM	4
SPECIFIKACE	4
UPOZORNĚNÍ	5
OBSAH BALENÍ	5
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	6
FOTONOVÁ TERAPIE	6
ČERVENÉ SVĚTLO (VLNOVÁ DÉLKA 625NM)	6
MODRÉ SVĚTLO (VLNOVÁ DÉLKA 465NM)	6
IONIZACE – GALVANICKÝ PROUD	7
VIBRAČNÍ MASÁŽ	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POPIS TLAČÍTEK	9
POPIS DISPLEJE	10
NASTAVENÍ A VÝZNAM PROGRAMŮ	11
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	14
OŠETŘENÍ AKNÓZNÍ PLETI	16
OŠETŘENÍ TMAVÝCH KRUHŮ POD OČIMA	16
JAKÝCH VÝSLEDKŮ MŮŽETE DOCÍLIT	17
NABÍJENÍ BATERIE	17
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	17
TECHNICKÉ PARAMETRY	18
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	18
EU DISTRIBUTOR	18
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	19

ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pročtěte si prosím před prvním použitím pečlivě tento návod k obsluze a uchovejte si jej pro případné pozdější použití.

Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-1150 bude hýčkat vaší pleť hned několika technologiemi: ultrazvukovými vlnami, fotonovou terapií, ionizací a navíc příjemnou vysokofrekvenční mechanickou masáží. A to vše účinně, bezbolestně, neinvazivně!

Technologie ošetření přístrojem BR-1150(W):

1. Ultrazvukové vlny.
2. Fotonová terapie.
3. Ionizace (galvanický proud).
4. Vysokofrekvenční mechanická masáž.

SPECIFIKACE

- Technologie ultrazvukových vln o frekvenci 3MHz.
- Tři světelné režimy fotonové terapie: červená a modrá.
- Vysokofrekvenční mechanická masáž.
- Aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli.
- Používání je naprosto bezpečné a bezbolestné.
- Šetrný k pokožce.
- Vhodný pro všechny typy pleti.
- Snadné ovládání pomocí tlačítek na těle přístroje.
- Kompaktní, malý a lehký.
- Přístroj je určen pro všechny typy pleti.



UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



OBSAH BALENÍ

- Galvanická žehlička pro ošetření pleti.
- Napájecí USB kabel.
- Síťový adaptér 220V.
- Ochranné textilní brýle.
- Textilní pouzdro.
- Návod k obsluze.

ULTRAZVUKOVÉ VLNY

Aplikátor z ušlechtilé oceli po přiložení na ošetřovanou oblast uvolňuje energii se specifickým výkonem a frekvencí 3MHz. Hodnoty jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.



Hlavní výhody


- Zcela neinvazivní charakter ošetření.
- Bezpečné, bezbolestné a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Účinné na povadlou a nezdravě vyhlížející pleť.
- Pleť má omlazený a prozářený vzhled.

Poznámka:

Při používání funkce ultrazvukových vln vždy použijte čirý vodivý gel, který zakoupíte ve všech prodejnách zdravotnických potřeb. Před použitím naneste jemnou vrstvu na hlavici přístroje. Gel zlepšuje vodivost a celkový přenos vln z hlavičky do pokožky. Po ukončení ošetření aplikační hlavici pečlivě očistěte suchým hadříkem (nepoužívejte žádné agresivní čisticí přípravky či roztoky).

FOTONOVÁ TERAPIE

Terapie světlem patří mezi nejstarší metody, které napomáhají v boji proti rozličným kožním defektům. Fotonová terapie využívá přirozené světelné vlny, které generují LED diody. Vlny ve specifických délkách jsou předávány do kůže. Světlo proniká do těla jako proud energie (ve formě fotonů), která je vstřebávána jednotlivými složkami kůže. Různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Model BR-1150 kombinuje 3 druhy světla (červené, modré, zelené).

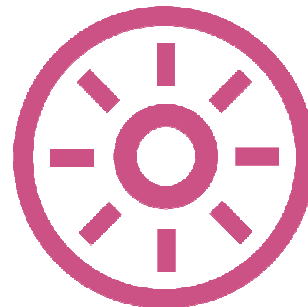

ČERVENÉ SVĚTLO (vlnová délka 625nm)


- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků.
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni.
- Brání v tvorbě pigmentu.

MODRÉ SVĚTLO (vlnová délka 465nm)

- Aktivuje porfyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie).
- Antibakteriální a protizánětlivý účinek.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Bezpečné a efektivní ošetření.

IONIZACE – GALVANICKÝ PROUD

Ionizace je proces, během kterého pronikají ionty přímo do jednotlivých vrstev pokožky. Dochází k uvolnění kožních pórů. Působením iontů získávají buňky lepší schopnost absorbovat výživové látky z krémů, masek a sér hlouběji do pokožky. Ošetření je vhodné pro suchou, mastnou i citlivou pleť. Nespornou výhodou působení iontů je lepší přirozené absorbování vlhkosti.

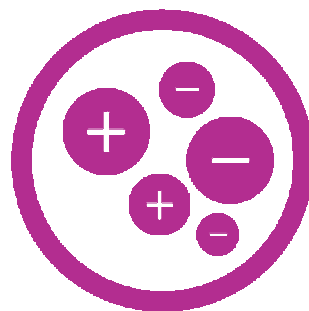

NEGATIVNÍ IONTY

- Fádání, unaveně vypadající pleť.
- Znamky stresu.
- Otoky.

KLADNÉ IONTY

- Důkladné vyčištění pleti.
- Tmavé skvrny v oblasti očí.
- Ulpívající nečistoty v pokožce.

PROČ NEGATIVNÍ IONTY?


- Násobně zvyšuje schopnost absorbovat výživové látky z krémů, masek a sér hlouběji do pokožky.
- Celkově osvěžuje pleť, uvolňuje svalovou tkáň a působí antimikrobiálně.

PROČ Kladné IONTY?


- Přispívá k obnově kolagenových vláken.
- Pomáhá k důkladnému čištění.

VIBRAČNÍ MASÁŽ

Aplikační hlavice má funkci vysokofrekvenční mechanické masáže. Generuje jemné kmity s frekvencí 12 000 kmitů/sekundu. Hlavní účinek je zlepšení krevního oběhu prostřednictvím stimulace lymfatického systému obličeje. Výsledkem je hladší, svěžší pleť. Lepší tonus (pleť je barevně jednotnější). Zároveň dochází k mechanické stimulaci kolagenních a elastických vláken.

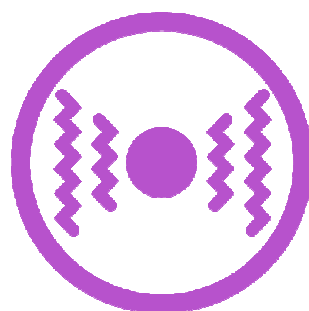

POPIS PŘÍSTROJE

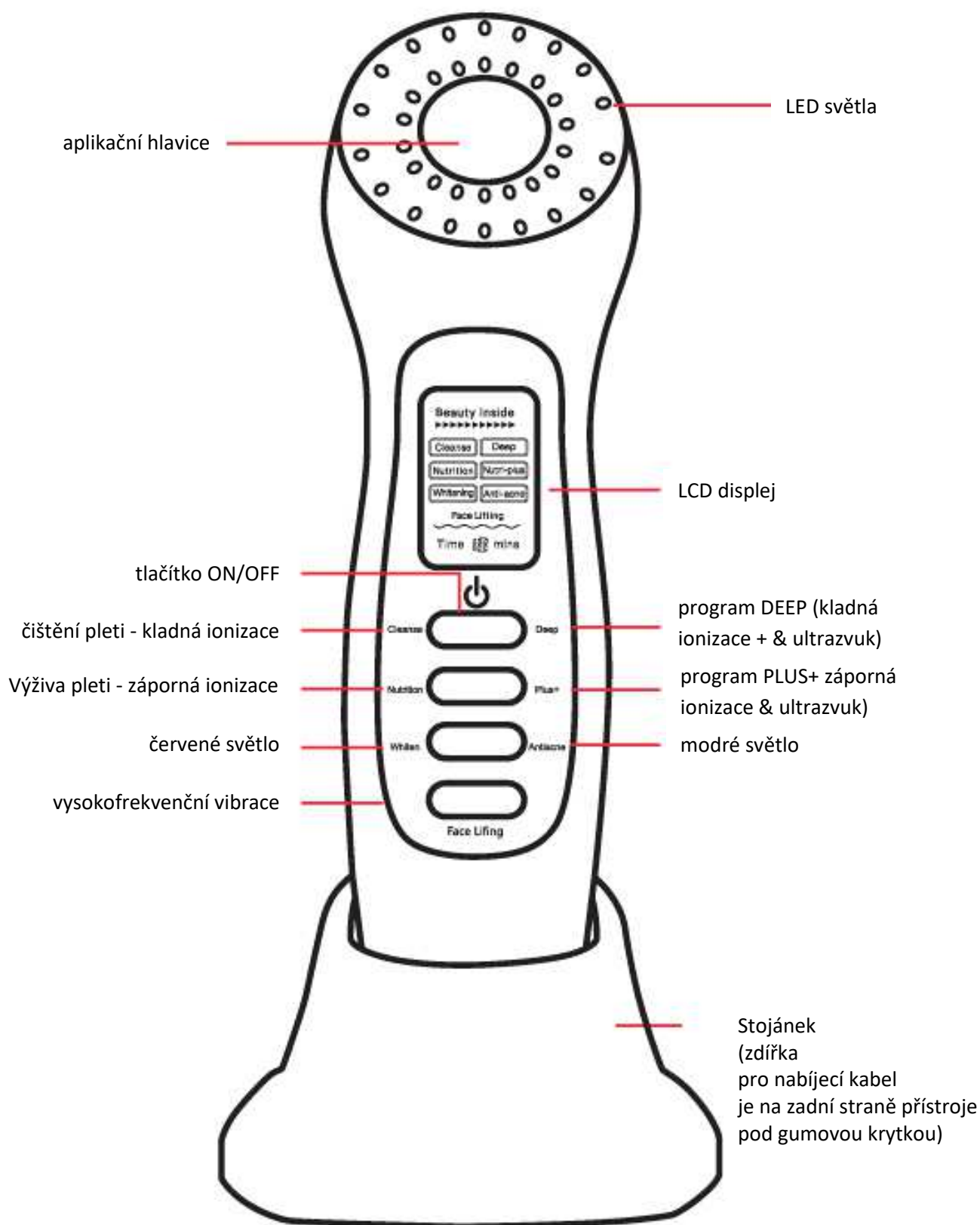

POPIS TLAČÍTEK

ON/OFF CLEANSE/DEEP

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje. Tlačítko je třeba stisknout dlouze. Krátkým stiskem si můžete přepínat mezi programy CLEANSE a DEEP.

NUTRITION/PLUS+

Tlačítko pro přepínání programů NUTRITION a PLUS+.

WHITENING/ANTI-ACNE


Tlačítko pro přepínání programů WHITEN a ANTI-ACNE.

FACE LIFTING

Tlačítko pro aktivaci programu FACE LIFTING.

POPIS DISPLEJE

- 1.** *Signalizace průběhu působení programu*
- 2.** *Program CLEANSE*
- 3.** *Program DEEP*
- 4.** *Program NUTRITION*
- 5.** *Program NUTRI-PLUS*
- 6.** *Program WHITENING*
- 7.** *Program ANTI-ACNE*
- 8.** *Program FACE LIFTING*
- 9.** *Signalizace průběhu působení programu*
- 10.** *Čas použití přístroje v minutách*

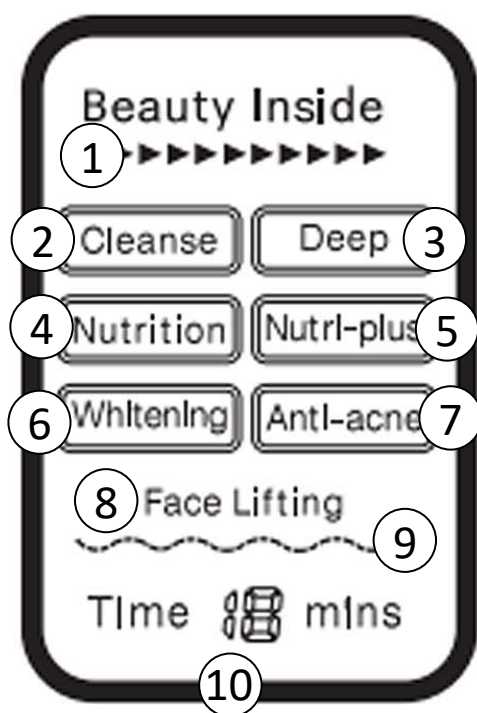

NASTAVENÍ A VÝZNAM PROGRAMŮ

Nyní vám popíšeme, jakým způsobem si nastavit jednotlivé funkce přístroje. Vždy se vychází z výchozího pohotovostního stavu, který nastane po zapnutí přístroje pomocí stisku tlačítka **ON/OFF**.

CLEANSE/DEEP

- Programy **CLEANSE** a **DEEP** jsou určeny pro fázi čištění pleti.
- Program **CLEANSE** aktivuje technologii galvanického proudu s kladným nábojem. Program pracuje v délce 5 minut.
- Program **DEEP** aktivuje technologii galvanického proudu s kladným nábojem a ultrazvuk. Program pracuje v délce 10 minut.
- Při zobrazení času 1 minuty se přístroj nachází v pohotovostním režimu.
- Oba programy jsou určeny pro čištění pleti.
- Postupujte tak, že běžným způsobem odstraníte dekorativní makeup (klasickým kosmetickým tampónkem nebo micelární vodou).
- Naneste na celou plochu obličeje čistící krém značky dle vašeho výběru. Doporučujeme použít program **DEEP** v délce 10 minut. Použít můžete také klasický sonogel.
- Hlavici přístroje postupně krouživými pohyby ošetřete celou plochu obličeje.
- Kladný náboj galvanického proudu přitahuje nečistoty z pleti ven.
- Technologie ultrazvuku napomáhá vyčistit velmi intenzivně veškeré mechanické nečistoty na povrchu pleti

Poznámka:

Při používání funkce ultrazvukových vln vždy použijte čirý vodivý gel, který zakoupíte ve všech prodejnách zdravotnických potřeb. Před použitím naneste jemnou vrstvu na hlavici přístroje. Gel zlepšuje vodivost a celkový přenos vln z hlavičky do pokožky. Po ukončení ošetření aplikační hlavici pečlivě očistěte suchým hadříkem (nepoužívejte žádné agresivní čistící přípravky či roztoky).

Info:

Výskyt ultrazvukových vln ověříte jednoduchým způsobem. Při zapnuté funkci ultrazvukových vln naneste na aplikační hlavici dvě až tři malé kapky vody. Takto nanesený vzorek vody je ultrazvukovými vlnami okamžitě rozkmitán.

NUTRITION/PLUS+

- Programy **NUTRITION** a **PLUS+** jsou určeny pro výživu pleti.
- Program **NUTRITION** aktivuje technologii galvanického proudu se záporným nábojem. Program pracuje v délce 5 minut.
- Program **PLUS+** aktivuje technologii galvanického proudu se záporným nábojem a ultrazvuk. Program pracuje v délce 10 minut.
- Při zobrazení času 1 minuty se přístroj nachází v pohotovostním režimu.
- Oba programy jsou určeny pro zapracování kosmetických přípravků do pleti.
- Výživa pleti by měla následovat po čištění pleti.
- Postupujte tak, že nanese na pleť váš oblíbený kosmetický přípravek v libovolné konzistenci (krém, gel, olejíček, sérum, vodička).
- Doporučujeme použít program **PLUS+** v délce 10 minut. Použít můžete kosmetický přípravek libovolné značky dle vašeho výběru.
- Hlavič přístroje postupně krouživými pohyby ošetřete celou plochu obličeje.
- Záporný náboj galvanického proudu napomáhá penetrovat účinné látky z kosmetického přípravku hluboko o pleti.
- Technologie ultrazvuku výrazně přispívá k tomu, aby se kosmetický přípravek efektivně zapracovat pod povrch pleti. Kosmetický přípravek tak v režimu PLUS+ zapracujete dvojnásobným efektem = **galvanický proud + ultrazvuk**.

Poznámka:

Vnímání galvanického proudu na pleti je velmi specifické a individuální. Záleží na citlivosti pleti každého uživatele. Galvanický proud je možné na pleti vnímat jako jemné mravenčení s pocitem mírného štípání (není závada ale průvodní jev působení galvanického proudu).

WHITENING/ANTI-ACNE

- Programy **WHITENING** a **ANTI-ACNE** jsou určeny pro ošetření pleti pomocí fotonové terapie.
- V programu **WHITENING** je aktivní červené světlo.
- V programu **ANTI-ACNE** je aktivní modré světlo.
- Každá barva světla má specifickou vlnovou délku se specifickými účinky na pleti.
- Pro oba programy je nastavený časovač v délce 10 minut.

ČERVENÉ SVĚTLO (vlnová délka 625nm)

- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků.
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni.
- Brání v tvorbě pigmentu.

MODRÉ SVĚTLO (vlnová délka 465nm)

- Aktivuje porphyryny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie).
- Antibakteriální a protizánětlivý účinek.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Bezpečné a efektivní ošetření.

UPOZORNĚNÍ !

Před aplikací přístroje na pleti aplikujte ochranné textilní brýle, které jsou součástí balení. Chrání váš zrak, protože působení fotonového světla je velmi intenzivní.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ FOTONOVÉHO SVĚTLA

- Fotonové světlo působí na pleť na úrovni kožních buněk. V průběhu použití nebudete na pleti cítit žádné nepříjemné pocity.
- Fotonové světlo patří do kategorie neinvazivního ošetření pleti. Použití je pro uživatele velice komfortní. Pro maximálně dosažitelné účinky je třeba používat přístroj pravidelně. Optimální frekvence používání je 3x až 4x do týdne v délce 10 až 20 minut.
- Není vždy třeba používat všechny barvy. Zvolte ty barvy světla dle jejich účinků. Modré světlo = antibakteriální účinek, červené světlo = podpora tvorby kolagenu. V jeden den můžete samozřejmě použít více barev světla. V jeden den by celková délka neměla přesáhnout 30 minut.
- Pro dosažení a udržení účinku je třeba neustálá pravidelnost používání. Fotonové světlo aktivně pracuje při stálém a opakovaném používání.
- Při použití světelné terapie se vždy snažte plynule pohybovat v oblasti obličeje tak, aby byla postupně nasvícena celá její plocha.

FACE LIFTING

- Program **FACE LIFTING** je určen pro vysokofrekvenční masáž pleti.
- Program pracuje v délce 15 minut.
- Program **FACE LIFTING** obvykle následuje po výživě pleti.
- Hlavicí přístroje postupně krouživými pohyby ošetřete celou plochu obličeje.
- Technologie vysokofrekvenčních vibrací výrazně zlepšuje krevní oběh. Podpoří se látková výměna lymfatického systému obličeje. Hlavice poskytuje velmi intenzivní a efektivní mikro masáž pleti.
- Funkci je možné použít v návaznosti na předchozí fáze ošetření pleti.

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

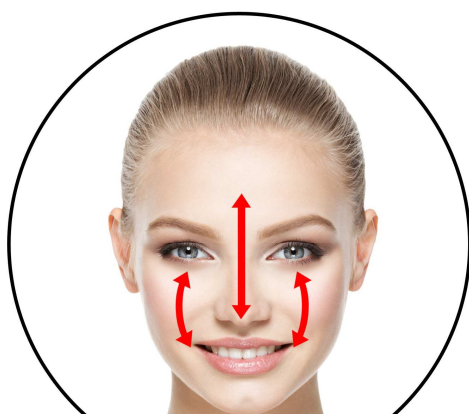

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

Poznámka:

Při ošetření se snažte, aby byla aplikační hlavice co nejvíce v kontaktu s pletí.

Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme pleť ošetřit přístrojem ne déle jak 30 minut přibližně 3x týdně.

Krok 1: Hlubkové čištění

1. Zvolte program **CLEANSE** nebo **DEEP**.
2. Pomocí vatového tampónku proveďte odlíčení pleti. Nyní můžete zahájit přístrojové ošetření pleti. Optimální čas 5 až 10 minut. Aplikační hlavici se pohybujte po pleti pomalu. Po přístrojovém ošetření omyjte pleť vodou pro dokončení procesu čištění.

Krok 2: Zlepšení absorbování výživových látek ze sér a přípravků

1. Zvolte program **NUTRITION** nebo **NUTI-PLUS**.
2. V tomto kroku můžete kombinovat přístrojové ošetření s následujícími kosmetickými přípravky: tonizující pleťová voda, vyživující přípravky, esenciální olej, aloe vera gel, ...) značky dle vašeho výběru. Optimální čas 5 až 10 minut. Aplikační hlavici se pohybujte po pleti pomalu. Ideálně krouživými nebo táhlými pohyby.

Krok 3: Fotonová terapie

1. Zvolte program **WHITENING** nebo **ANTI-ACNE** s barvou světla dle vaší potřeby.

ČERVENÉ SVĚTLO (vlnová délka 625nm)

Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu. Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků. Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni. Brání v tvorbě pigmentu.

MODRÉ SVĚTLO (vlnová délka 465nm)

Aktivuje porphyryny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie). Antibakteriální a protizánětlivý účinek. Prevence proti tvorbě akné. Bezpečné a efektivní ošetření.

2. Optimální čas 10 minut. Pro každou barvu. Aplikační hlavici se pohybujte po pleti pomalu.

Krok 4: Relaxace a podpoření krevního oběhu

1. Zvolte program **FACE LIFTING**. Aplikační hlavici přiložte na pleť. Přibližně po 10 vteřinách přesuňte hlavici o kousek dále. Takto postupujte tzv. bodovým pohybem po celém obličeji. Hlavici se pohybujte na pleti po místech, kde je vám ošetření vibracemi příjemné.
2. Optimální čas 15 minut.

Tento typ ošetření je ideální jako závěrečný krok ošetření pleti. Pleť relaxuje, uvolní se zatuhlá jemná svaly a podpoří se krevní oběh a lymfatický systém obličeje.

OŠETŘENÍ AKNÓZNÍ PLETI

Četnost opakování: každý večer

Krok 1:

Vyčistěte pleť. Použijte program CLEANSE nebo DEEP. Ošetřete pleť v délce 5 až 10 minut. Omyjte pleť vodou a vysušte.

Krok 2:

Použijte program ANTI-ACNE s funkcí fotonového světla modré barvy. Vždy použijte ochranné textilní brýle!! Doporučený čas: 10 minut.

OŠETŘENÍ TMAVÝCH KRUHŮ POD OČIMA

Četnost opakování: 2x až 3x týdně

Krok 1:

Hlubkové intenzivní čištění pleti (stejným způsobem, jako v předchozím odstavci). Zaměřte se zejména na oblast kolem očí. Pleť omyjte pečlivě vodou a vysušte.

Krok 2:

V oblasti kolem očí aplikujte vyživující nebo oční sérum na tmavé kruhy pod očima. Zvolte program **NUTRITION** nebo **NUTRI-PLUS**. Kosmetický přípravek tak velmi efektivně zapracujete.

Krok 3:

Zvolte funkci WHITENING s funkcí fotonového světla červené barvy. Vždy použijte ochranné textilní brýle!! Doporučený čas: 10 minut.

JAKÝCH VÝSLEDKŮ MŮŽETE DOCÍLIT

Po dokončení ošetření může pleť mírně zarudnout. Zarudnutí je způsobeno rozšířením krevních cév a zvýšeným prokrvením. V některých případech se mohou objevit i mírné otoky, což způsobuje zejména výskyt více tekutiny na konkrétních místech, než na ostatních místech. Tyto příznaky však znamenají, že jste dosáhli požadovaného cíle. Všechny tyto na první pohled negativní příznaky zmizí pozvolna krátce po dokončení ošetření.

Výsledkem ošetření bude viditelné zlepšení pružnosti a textury pleti. Pleť bude hladší a zjemní se přechody v hrubších oblastech pokožky. Ošetřená oblast pleti bude mít výrazně jemnější mimické a vějířkovité vrásky. Výsledky závisí především na dodržování všech kroků ošetření pleti a typu vaší pleti.

Klinické studie prokázaly, že se u sledovaných uživatelů přístroje prokázalo snížení jemných linek o 30% a 16% výraznějších vrásek v období 4 týdnů. Celkově se kvalita pleti výrazně zlepšila jak vizuálně, tak i na dotek. Výsledky se lišily v závislosti na individuálních vlastnostech pleti, věku a pohlaví uživatele.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Vstup pro nabíjecí kabel je umístěn na spodní straně přístroje. Nabíjecí kabel je součástí balení. Druhý konec zapojíte do USB portu počítače nebo notebooku nebo adaptéru.

Postup nabíjení:

- 1.** Nízký stav baterie indikuje ikona baterie v pravém horním rohu displeje.
- 2.** Pro nabíjení používejte napájecí kabel s adaptérem. Jsou součástí základního balení.
- 3.** V průběhu nabíjení bliká symbol baterie.
- 4.** Jakmile je baterie nabita, blikání ikony baterie ustane.
- 5.** Délka nabíjení závisí na stavu vybití a kondici baterii. Současně se délka nabíjení odvíjí od toho, zda baterii nabíjíte přes USB port počítače nebo síťový adaptér. Přes síťový adaptér bývá baterie rychleji nabita.
- 6.** V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Tímto přípravkem čistěte výhradně nerezovou aplikační hlavici. Dbejte na to, aby vlhkost nevnikla do přístroje.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence: 3 MHz.
- Vlnová délka červeného světla: 625 nm.
- Vlnová délka modrého světla: 465 nm.
- Fotonovou terapii zajišťují výkonné LED diody.
- Součástí balení jsou ochranné textilní brýle.
- Rozměry: 5x17x5 cm.
- Hmotnost: 165 g.
- Baterie: zabudovaná li-ion baterie.
- Napájení: USB kabelem se síťovým adaptérem 220V.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a

napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o. | Mojžírovo nám. 75/2, 612 00 Brno IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

Kontaktní email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s názvem

Kosmetický přístroj pro ošetření pleti

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1150**

EAN: **8594166103306**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60601-1-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014

EN 62471:2008

Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: **ENC170811GZ57E1;**

ENC170811GZ57L1

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.1.2024