

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-1990B

VIBRASKIN FLEX



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	8
OPTIMÁLNÍ POSTUP OŠETŘENÍ PLETI	8
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	9
NABÍJENÍ BATERIE	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	10
CERTIFIKACE	10
DOVOZCE	10

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání přístroje.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.
- Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
- Přístroj nesdílejte s druhými osobami. Pokud ano, vždy dbejte na důkladné vyčištění přístroje od nečistot a bakterií.



OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax VIBRASKIN FLEX.
- Nabíjecí kabel.
- Návod k obsluze.

ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Vibraskin Flex je zajímavá inovace kosmetického přístroje z kategorie čistících kartáčků na pleť. Aplikální hlavice je umístěna na flexibilním „krku“. Snadno se používá a maximálně se přizpůsobí záhybům obličeje. Přístroj je oboustranně použitelný. Jedna strana aplikátoru se silikonovými štětinkami slouží k hloubkovému vyčištění kožních pórů. Druhá strana aplikátoru poskytuje stimulaci pleti teplem. Kožní póry se působením tepla otevřou a čištění je efektivnější. Možnost nastavení rychlosti vibrací. Oceníte bezdrátové nabíjení a vodotěsnost IPX5.



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

- Využití obou stran aplikační hlavičky se specifickými účinky
- Kartáčková strana pro hloubkové čištění kožních pórů
- Strana s kartáčkem je až 1,5x delší než u přístrojů obdobného typu
- Strana s kartáčkem je speciálně zakřivena do oblého tvaru
- Strana s hladkým aplikátorem pro působení tepla
- Skvělé pro zaměření na T-zónu obličeje
- Redukuje mastnotu pleti
- Odumřelá kožní rezidua jsou s vysokou účinností odstraněna
- Pletť je hladká a svěží
- Ideální použití při sprchování nebo koupeli
- Určeno pro rutinní každodenní péči
- 4 úrovně nastavení rychlosti vibrací
- Vhodný pro všechny typy pleti

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence oscilací: až 6000 kmitů za minutu
- Tepelná terapie: 45°C
- Materiál: zdravotně nezávadný silikon
- Vodotěsný ochranný standard: IPX5
- Napájení: nabíjecí Li-ion baterie
- Nabíjení: USB kabelem (součástí balení)
- Hmotnost: 99g
- Rozměry: 18x4,6x3,4cm



POPIS PŘÍSTROJE

1. Kartáčková strana pro hloubkové čištění kožních pórů
2. Strana s hladkým aplikátorem pro působení tepla
3. Tlačítko **ON/OFF** - změna programu
4. Vstup pro napájecí kabel




OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**.
2. Pomocí stejného tlačítka si můžete nastavit jednu ze čtyř rychlostí vibrací.
3. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete vyhřívání hladké strany aplikátoru.
4. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** přístroj vypnete.

OPTIMÁLNÍ POSTUP OŠETŘENÍ PLETI

1. Než přistoupíte k samotnému ošetření pleti přístrojem, doporučujeme pleť odlíčit od make-upu běžným způsobem. Pokud nebyl make-up použit, opláchněte obličej vodou. Obličej osušte.
2. Pomocí tlačítka **ON/OFF** aktivujte vyhřívání hladké strany aplikátoru.
3. Opakovanými pohyby postupně nahřejte obličej. Dojde k uvolnění obličeje a otevření kožních pórů. Rozšířené kožní póry jsou základním předpokladem pro důkladné vyčištění pleti.
4. Naneste na pleť čistící krém, který běžně používáte.
5. Na přístroji aktivujte režim vibrací. Začněte od nejnižší rychlosti a přidávejte postupně dle vašeho uvážení.
6. Pohybujte se po pleti krouživými pohyby v doporučených směrech popsanych v pasáži:

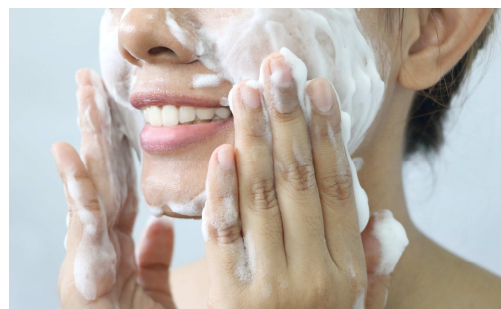

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU

7. Kosmetický přístroj je vodotěsný. Můžete jej pro ještě důkladnější vyčištění pleti používat během sprchování. Využijte pozitivní efekt horké vody, která uvolní kožní póry.
8. Pokud máte oblíbené kosmetické přípravky, pomocí aplikační hlavice se štětkami kosmetický přípravek krouživými pohyby vmasírujte do pokožky. Využijte nejnižší úroveň působení vibrací.

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU




ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru

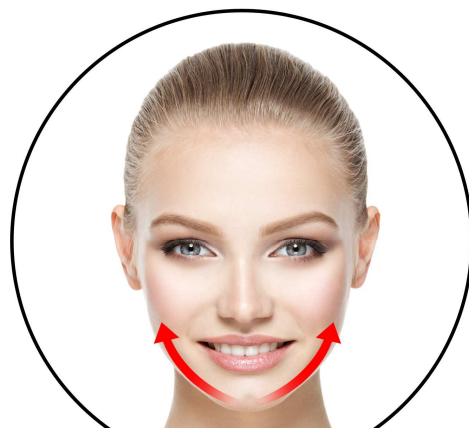

BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

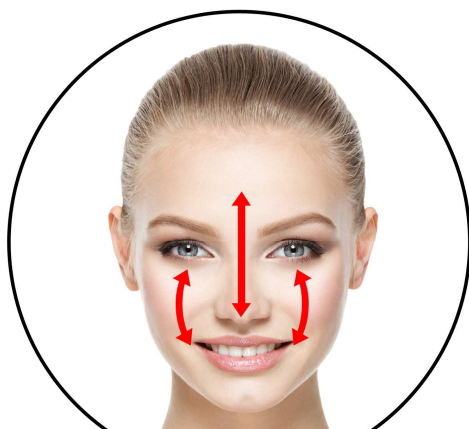

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Baterie se nabíjí pomocí kabelu, který je součástí balení.

Upozornění: Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí kabel, který je součástí balení.
2. Jeden konec kabelu zapojte do vstupu v přístroji. Druhý konec do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Nabíjení může trvat až 2 až 3 hodiny v závislosti na stavu baterie.
4. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.