

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický multifunkční přístroj

BeautyRelax BR-2240

BODYFACE SWITCH



OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	4
UPOZORNĚNÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
KONTRAINDIKACE	6
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	6
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	6
LYMFATICKÉ UZLINY - REŽIM OŠETŘENÍ TĚLA	7
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	10
ULTRAZVUK 1MHZ - POUŽITÍ NA TĚLO	10
ULTRAZVUK 3MHZ - POUŽITÍ NA OBLIČEJ	10
FOTONOVÁ TERAPIE	11
ČERVENÉ SVĚTLO	11
MODRÉ SVĚTLO	11
ZELENÉ SVĚTLO	11
DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST	11
CO MŮŽETE OČEKÁVAT APLIKAČNÍ HLAVICE ULTRAZVUK 1MHZ	12
TECHNICKÉ PARAMETRY	12
OBSAH BALENÍ	12
POPIS PŘÍSTROJE	13
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	14
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	15
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	16
NASTAVENÍ ÚROVNĚ VÝKONU ULTRAZVUKU	17
ČAS OŠETŘENÍ TĚLA	18
TEST PLETI	19
SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE	19
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA	20
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE	25
NABÍJENÍ BATERIE	26
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	26
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	26
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	27
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	29
CERTIFIKACE	29
DOVOZCE	29
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	30

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Estetický přístroj pro neinvazivní ošetření vybraných částí těla pracuje s technologií, která je bezbolestná a bezpečná. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost splňuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených bezpečnostních norem. Aby bylo možné efektivně stimulovat podkožní tukovou tkáň, pracuje přístroj s určitým výkonem. Pokud nebudete postupovat dle uvedených pokynů, nebudete ctít upozornění a výčet kontraindikací, můžete si váš zdravotní stav v krajním případě negativně ovlivnit. Na druhou stranu nemějte z používání přístroje obavu. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny používání v domácích podmínkách bez dohledu erudované osoby z oblasti zdravotnictví.

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie masážních/estetických přístrojů. Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě obezity ani jiných souvisejících omezení. Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají v redukci podkožního tuku.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní ošetření. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost adaptéru a všech elektronických součástí.
- Ošetření je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (sonogel). Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Ultrazvuk získá lepší schopnost navázat se na pleť.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.

Tým BeautyRelax.cz

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



POUŽITÍ SONOGELU

Použití přístroje je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny získají lepší schopnost se navázat na pleť. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Oblast štítné žlázy
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Locket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ


- Předloktí - APLIKÁTOR NA TĚLO 1MHZ
- Paže - APLIKÁTOR NA TĚLO 1MHZ
- Bříško - APLIKÁTOR NA TĚLO 1MHZ
- Stehna - APLIKÁTOR NA TĚLO 1MHZ
- Zadeček - APLIKÁTOR NA TĚLO 1MHZ
- Lýtky - APLIKÁTOR NA TĚLO 1MHZ
- Obličej - APLIKÁTOR NA OBLIČEJ 3MHZ



Poznámka: párová oblast těla je brána jako jedna partie


LYMFATICKÉ UZLINY - REŽIM OŠETŘENÍ TĚLA

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Pohyby aplikační hlavice s ultrazvukem jsou v těchto oblastech **přísně zakázány**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

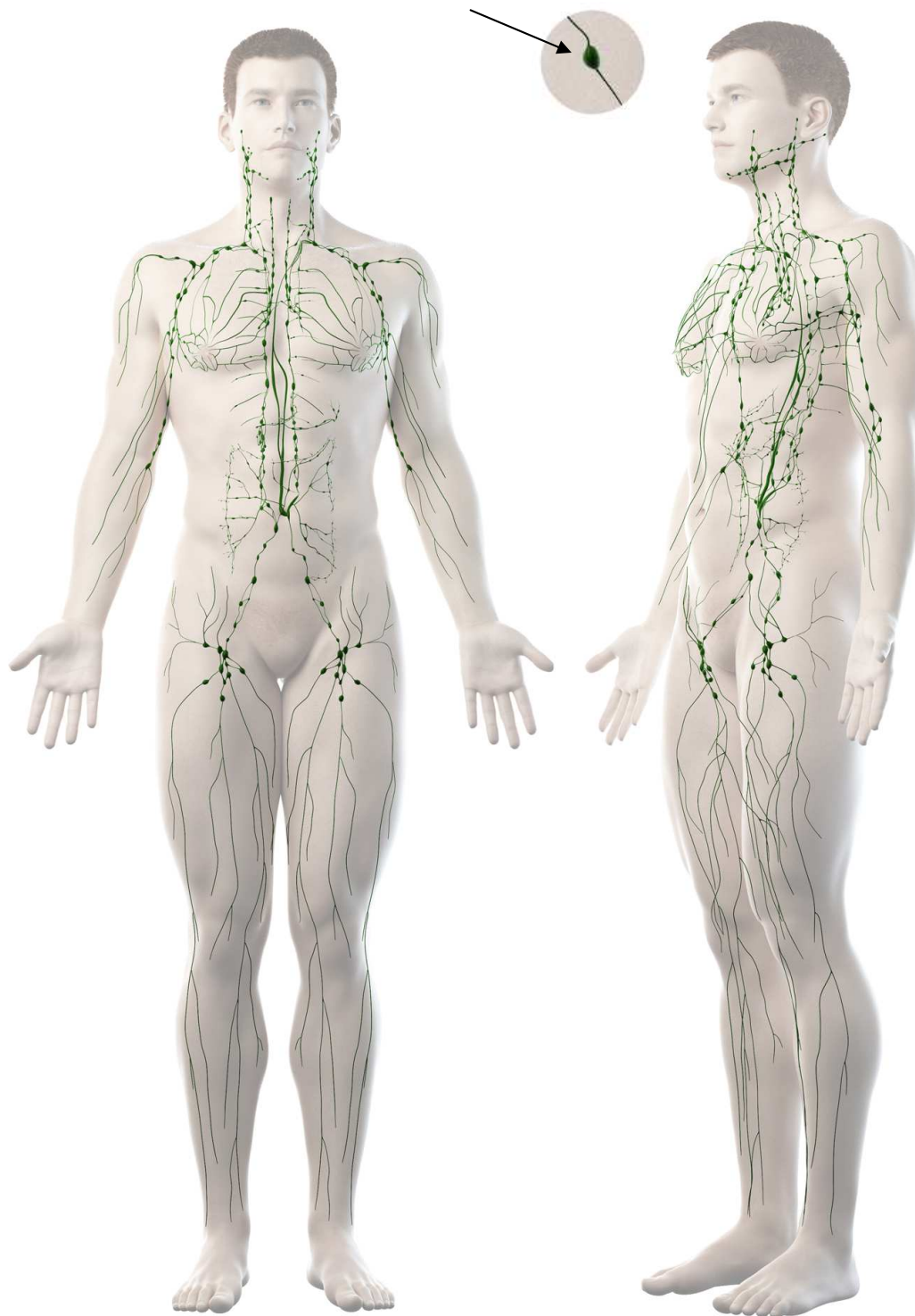


LYMFATICKÉ UZLINY - REŽIM OŠETŘENÍ TĚLA

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Pohyby aplikační hlavice s ultrazvukem jsou v těchto oblastech **přísně zakázány**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

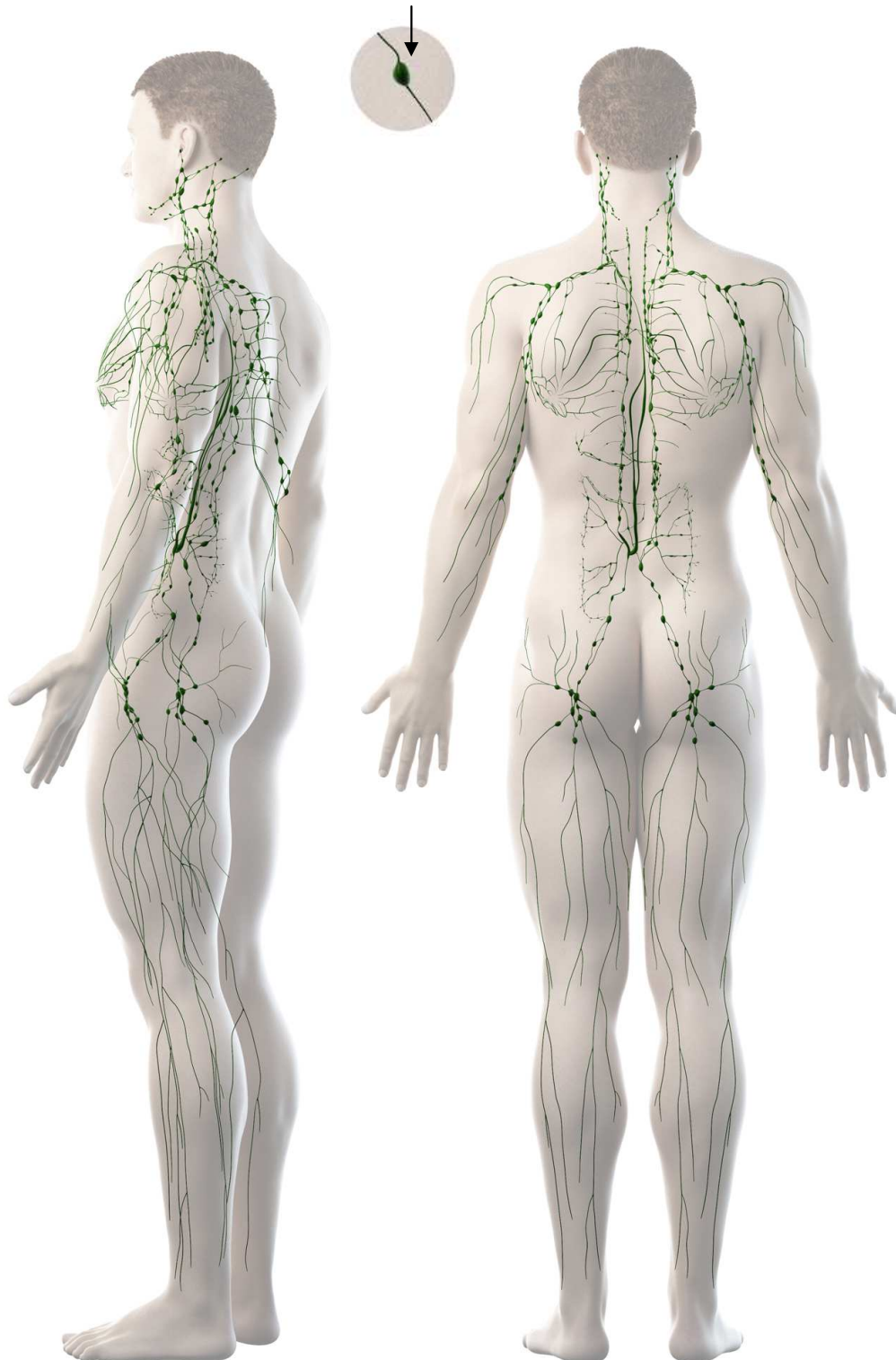

LYMFATICKÉ UZLINY - REŽIM OŠETŘENÍ TĚLA

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Pohyby aplikační hlavice s ultrazvukem jsou v těchto oblastech **přísně zakázány**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

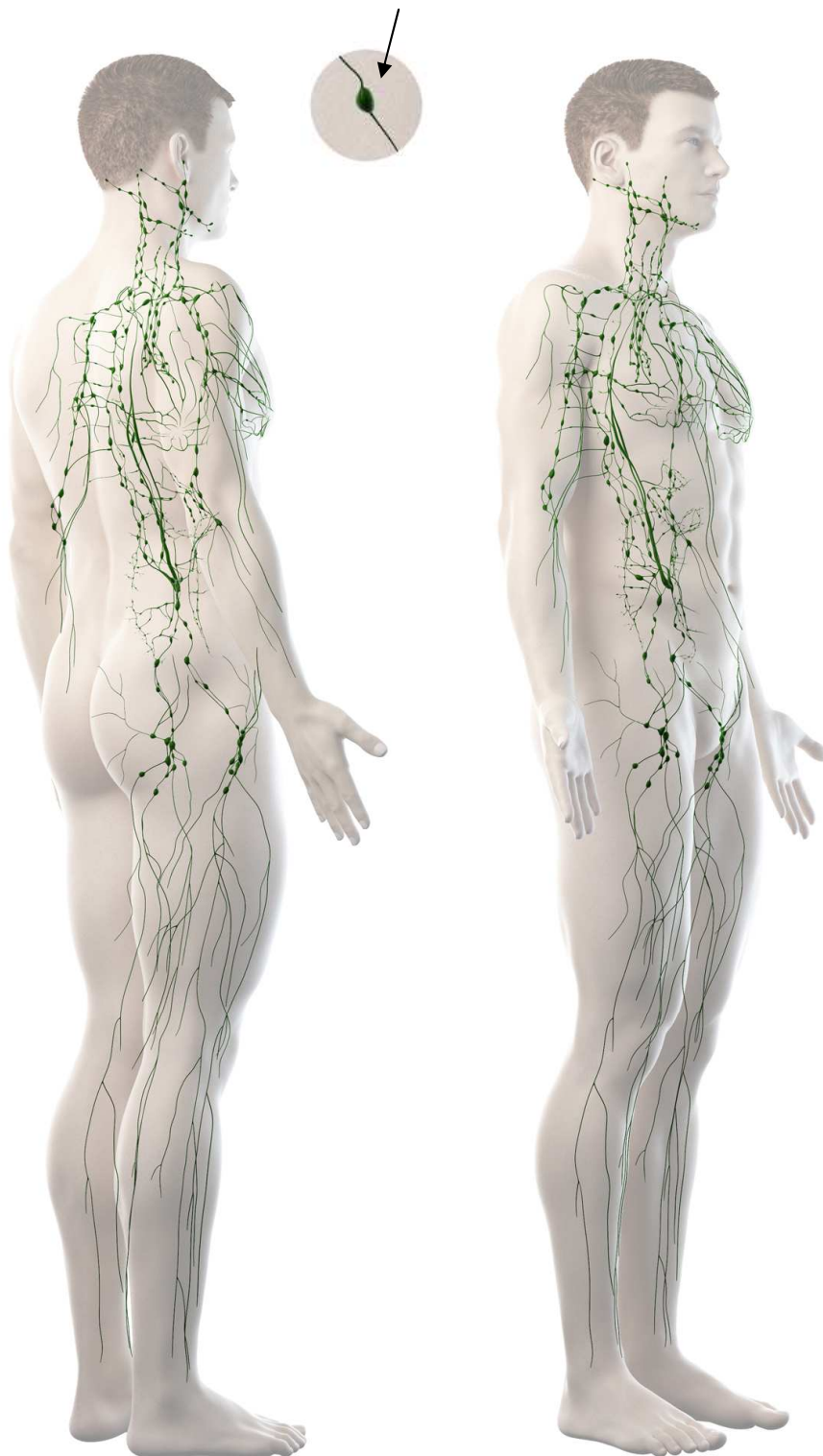

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Kosmetický přístroj BeautyRelax Bodyface Switch se stane nepostradatelným pomocníkem pro ošetření obličeje a těla. Nabízí unikátní systém vyměnitelných hlavic. Nahrazuje použití až 3 přístrojů. Vaši pleť efektivně ošetří pomocí ultrazvuku a fotonové terapie. Pomocí vyměnitelných hlavic můžete zvolit ultrazvuk s frekvencemi 1MHz a 3MHz. Ultrazvuk omlazuje pleť a režim fotonové terapie působí podle toho, jakou vlnovou délku si nastavíte. Kosmetický přístroj BeautyRelax Bodyface Switch je multifunkční řešení pro vysoce účinné estetické ošetření pleti!

ULTRAZVUK 1MHZ - POUŽITÍ NA TĚLO

Velká aplikační hlavice z ušlechtilé nerez oceli generuje ultrazvukové vlny ve specifické frekvenci 1MHz, které pronikají přes povrch pokožky až do podkoží, kde se nachází tuková tkáň. Dochází k neinvazivnímu porušení integrity tukových buněk a následnému uvolnění tuku. Takto uvolněný tuk se dále štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Odstraněný tuk se zpět do tkáně nevrací. Ultrazvuková kavitace je bezbolestná, neinvazivní, šetrná, účinná a hlavně trvalá metoda pro odstranění tukové tkáně, redukci celulitidy a vyhlazení pokožky.



ULTRAZVUK 3MHZ - POUŽITÍ NA OBLIČEJ

Aplikátor z ušlechtilé oceli po přiložení na ošetřovanou oblast uvolňuje energii se specifickým výkonem a frekvencí 3MHz. Hodnoty jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.




Hlavní výhody

- Zcela neinvazivní charakter ošetření.
- Bezpečné, bezbolestné a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Účinné na povadlou a nezdravě vyhlížející pleť.
- Pleť má omlazený a prozářený vzhled.

FOTONOVÁ TERAPIE


Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.

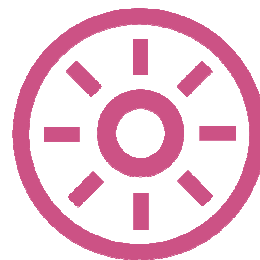

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.


ČERVENÉ SVĚTLO

- podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni
- brání v tvorbě pigmentu

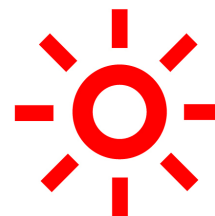


MODRÉ SVĚTLO

- aktivuje porfyriny (přispívá k zániku nežádoucích bakterií)
- antibakteriální a protizánětlivý účinek
- prevence proti tvorbě akné
- bezpečné a efektivní ošetření

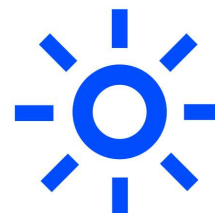

ZELENÉ SVĚTLO

- přispívá k eliminaci epidermálních pigmentových skvrn
- vyrovnává barevný tonus pokožky
- protizánětlivý účinek
- vhodný pro všechny typy pleti

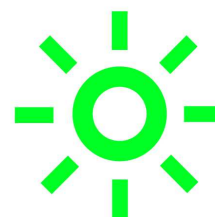

DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST

Než začnete pracovat s funkcí fotonové terapie, použijte vždy ochranné brýle, které jsou součástí balení. Z dlouhodobého hlediska tím výrazně chráníte svůj zrak. Aby byla terapie fotonovým světlem skutečně funkční, je zvýšena intenzita světla. Je však třeba před působením zdroje světla zrak chránit.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

APLIKAČNÍ HLAVICE ULTRAZVUK 1MHZ

- Cílené zaměření na tukovou tkáň v oblasti brady
- Dosažitelné a viditelné výsledky redukce podkožního tuku i v případech, kdy tuk prorůstá svalovou hmotou (zejména u mužů nebo sportovně založených žen)
- Aktivní stimulaci tukové tkáně se zaměřením na partie ženského i mužského těla
- Formování význačných kontur na rukou, nohách i na těle

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence ultrazvuku: 1MHz & 3MHz
- Vlnová délka červeného světla: 622x628nm
- Vlnová délka modrého světla: 462x468nm
- Vlnová délka zeleného světla: 522x528nm
- Součástí balení jsou ochranné brýle (v režimu fotonové terapie)
- Nabíjení: vestavěná baterie Li-ion 800mAh
- Napájení: USB kabelem nebo adaptérem 220V (součástí balení)
- Rozměry: 14,5x4x2cm
- Hmotnost: 190g

OBSAH BALENÍ


- BeautyRelax BR-2240 BODYFACE SWITCH
- Nabíjecí kabel
- Nabíjecí adaptér 220V
- Ochranné brýle
- Návod k obsluze

POPIS PŘÍSTROJE



1. Aplikální hlavice pro ošetření těla 1Mhz
2. Aplikální hlavice pro ošetření obličeje 3Mhz
3. Světelné režimy fotonového světla aplikátoru 3Mhz
4. Ovládací panel
5. Nabíjecí stojánek

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

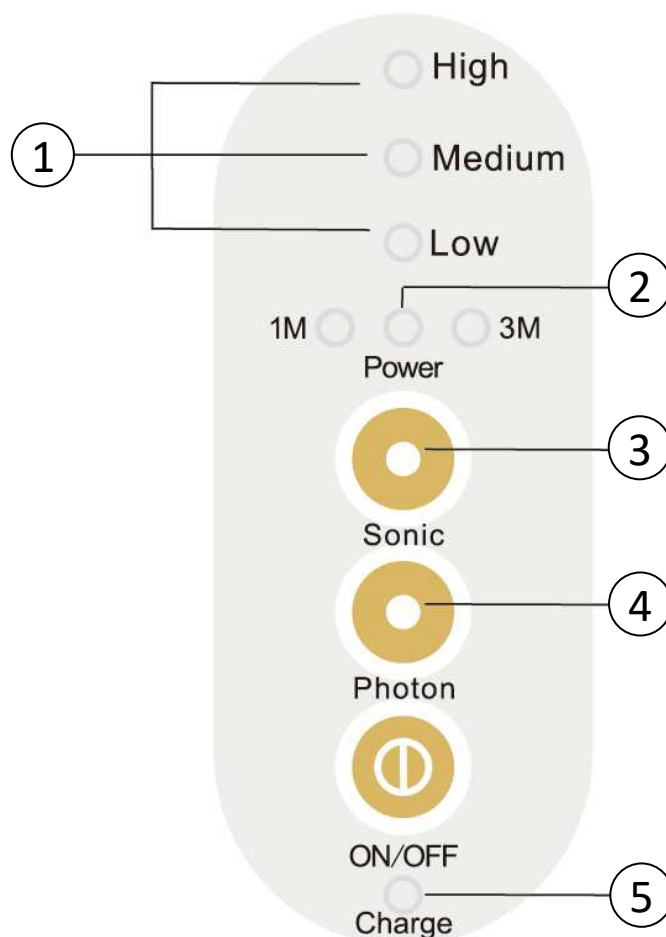

- 1.** Světelná signalizace úrovně výkonu ultrazvukových vln
High - vysoká, **Medium** - střední, **Low** - nízká
- 2.** Světelná signalizace provozu přístroje
- 3.** Tlačítko **SONIC** pro režim ultrazvukových vln
- 4.** Tlačítko **PHOTON** pro režim fotonové terapie
- 5.** Světelná signalizace napájení

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před použitím dostatečně nabijte baterii přístroje. K nabíjení používejte výhradně nabíjecí adaptér, který je součástí balení.
2. Na přístroj instalujte aplikační hlavici podle charakteru ošetření obličeje nebo těla. Aplikátor s velkou plochou použijte na oblast těla. Aplikátor s malou plochou a fotonovým světlem pro obličej.
3. Tlačítkem **ON/OFF** přístroj zapnete. Spuštění přístroje indikuje světelná signalizace **POWER**.
4. Stisknutím tlačítka **SONIC** aktivujete funkci působení ultrazvuku. Opakovaným stiskem tlačítka **SONIC** můžete měnit úroveň výkonu - LOW, MIDDLE, HIGH (nízká, střední, vysoká úroveň). Nastavenou úroveň výkonu ultrazvukových vln indikuje světelná signalizace na ovládacím panelu.
5. Působení ultrazvukových vln indikuje světelná signalizace. Podle typu aplikační hlavice svítí signalizace 1M (1Mhz) nebo 3M (3Mhz).
6. Stisknutím tlačítka **PHOTON** si můžete přepínat mezi jednotlivými režimy fotonové terapie - modré, červené nebo zelené světlo (platí pro aplikační hlavici s ultrazvukem 3Mhz a fotonovým světlem).
7. Nyní je třeba aplikovat tenkou vrstvu sonogelu (kontaktní gel pro zvýšení hydratace pleti). Sonogel můžete nanést na pleť nebo přímo na aplikační hlavici.
8. Pro ošetření těla postupujte podle pasáže v tomto návodu:
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA.
9. Pro ošetření obličeje postupujte podle pasáže v tomto návodu:
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE.
10. Po skončení použití přístroje ošetřete aplikační hlavici podle pasáže v tomto návodu:
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
11. Pro nabíjení baterie postupujte podle pasáže v tomto návodu:
NABÍJENÍ BATERIE.
12. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavici zvolte podle charakteru ošetření. Pro oblast těla za účelem stimulace tukové tkáně použijte aplikátoru s větší plochou s frekvencí ultrazvuku 1Mhu. Při instalaci/odinstalaci aplikátorem mírně pootočte. Pro ošetření obličeje s cílem stimulace kolagenních a elastických vláken použijte aplikátor s menší plochou a světlem fotonové terapie. Opačné použití aplikátorů je zakázáno.
2. Použití přístroje s funkcí ultrazvukových vln je vždy spojeno s použitím Sonogelu. Lidská pleť je pro technologie neinvazivního charakteru příliš suchá. Je třeba zvýšit její vodivost. Postačí tenká vrstva kontaktního gelu. Aplikujte po částech po menších částech obličeje nebo těla. Použití funkce ultrazvuku na sucho bez gelu není doporučena.
3. Než začnete pracovat s funkcí fotonové terapie, použijte vždy ochranné brýle, které jsou součástí balení. Z dlouhodobého hlediska tím výrazně chráníte svůj zrak. Aby byla terapie fotonovým světlem skutečně funkční, je zvýšena intenzita světla. Je však třeba před působením zdroje světla zrak chránit.
4. Z hlediska posloupnosti ošetření doporučujeme nejprve použití funkce ultrazvuku, setřít zbytky sonogelu z pleti a poté použít funkci fotonové terapie.
5. Barvy světla fotonové terapie můžete během jednoho použití libovolně střídat. Používejte ve zvýšené míře tu barvu světla, kterou vaše pleť v návaznosti na význam barvy vyžaduje.
6. Frekvence použití fotonového světla není omezena. Můžete používat každý den v doporučené délce 10 minut na celý obličej.
7. Aplikátor na obličej a tělo můžete během jednoho ošetření kombinovat. Pro aplikátor na tělo však vždy dodržujte pokyny pro jednotlivé intervaly použití v pasáži tohoto návodu:
ČAS OŠETŘENÍ TĚLA.
8. Než se s přístrojem dokonale seznámíte a osvojíte si všechny jeho funkce a vlastnosti, začínejte na nízké úrovni intenzity ošetření. Úroveň intenzity zvolte tak, aby vám bylo používání přístroje příjemné.
9. Při použití přístroje je optimální pohyb aplikátoru krouživými pohyby. Postupně se snažte pokrýt plochu vámi vybrané partie těla.

NASTAVENÍ ÚROVNĚ VÝKONU ULTRAZVUKU

Každé tělo je originál. Na různých částech těla máme různě silnou tukovou tkáň. S ohledem na odlišnost tukové tkáně je třeba pracovat s výkonem přístroje. Při vývoji estetického přístroje BeautyRelax Bodyface Switch byl kladen velký důraz na univerzálnost používání. Dávkování intenzity výkonu ultrazvuku umožňuje použití přístroje každému, kdo splňuje podmínky použití a netýká se ho žádný stav uvedený v seznamu kontraindikací.

Jak tedy správně rozpoznat, jaký stupeň výkonu nastavit?

Při nastavení postupujte následovně. Vždy začínějte na výkonu nejnižší úrovni **LOW** (nízká). Snažte se pocitově vnímat, jak působí ultrazvukové vlny na vši pleť. Při používání můžete cítit jemné mravenčení, ale samotné ultrazvukové vlny by neměli způsobit nepříjemné až bolestivé pocity. Hlavním smyslem využití technologie ultrazvukových vln je neinvazivní a hlavně bezbolestné použití. Věnujte tedy zvýšenou pozornost, aby vám nastavený výkon nezpůsobil žádné nepříjemné pocity. Nelze přesně stanovit, jaký stupeň výkonu použít na konkrétní partii. Rozhodně neplatím, čím větší výkon použijete, tím lépe. Proto začínějte vždy na úrovni intenzity **LOW** (nízká). Přidávejte postupně přes úroveň **MEDIUM** (střední) po **HIGH** (nejvyšší).

HIGH

MEDIUM

LOW

ČAS OŠETŘENÍ TĚLA

Čas ošetření by neměl přesáhnout **15 minut**. V případě párové části těl rozdělit tento čas na polovinu. Tzn. 7,5 minuty jedno stehno a 7,5 minut druhé stehno.

Ošetřit lze najednou maximálně dvě partie ve frekvenci maximálně jedenkrát do týdne. Stejnou partii je možné ošetřit nejdříve za 7 dní.

Příklad rozvrhu ošetření těla

Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota	Neděle
<i>paže + lýtka</i>	<i>volno</i>	<i>volno</i>	<i>stehna + lýtka</i>	<i>volno</i>	<i>volno</i>	<i>volno</i>

Proč volné dny?

Při ošetření těla estetickým přístrojem s funkcí ultrazvukové kavitace je nezbytně nutné dát tělu nějaký čas, aby mohlo přirozenou cestou zpracovat uvolněnou energii. Tukové buňky se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Po ukončení tohoto procesu je možné bezpečně přístrojové ošetření opakovat.




TEST PLETI

Každý jsme originál. Existuje celá řada typů pleti. Přestože je používání přístroje naprosto bezpečné, je doporučeno provést test pleti, zda použití nevyvolá případné nežádoucí podráždění pleti či alergickou reakci.


1. Naneste na pleť tenkou vrstvičku vodivého gelu
2. Ošetřete malou část pleti krouživými pohyby při aktivním režimu ultrazvukových vln (použijte postupně oba vyměnitelné aplikátory).
3. Nezapomeňte nastavit nejnižší úroveň působení ultrazvukových vln - **Low** (nízká).
4. Pokud se v průběhu 24 hodin na pleti neobjeví jakékoliv nestandardní zbarvení vlivem alergické reakce, přístroj můžete bez obav používat dle instrukcí v tomto návodu k obsluze.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Při používání vždy dbejte na to, aby byla aplikační plocha v plném rozsahu s pletí. V opačném případě nebude přístroj působit správně.

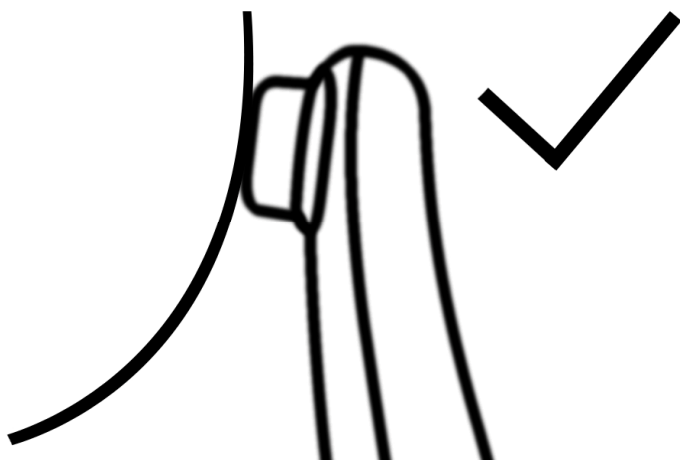

Správné použití

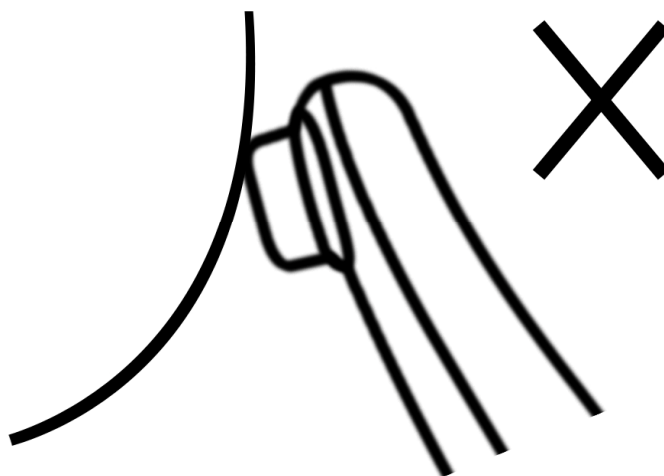

Nesprávné použití

MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA

UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE



PAŽE



Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na ruku. Aplikační hlavici přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně ošetřete vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujete se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.



Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem ošetřete postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.

PAS & BŘÍŠKO

Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživém pohybu. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.

HÝŽDĚ

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto ošetřit celou oblast hýždí.

STEHNA & LÝTKA

Aplikační hlavicí se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavicí se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavicí se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete ošetřit přední i zadní část končetiny.

MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

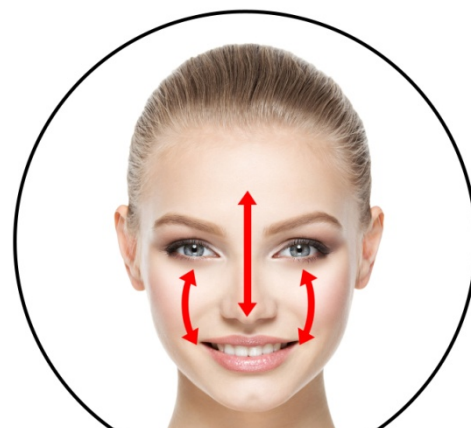

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Stav nabití baterie signalizuje ikona na displeji

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí adaptér, který je součástí balení.
2. Konektor připojte do vstupu na spodní straně přístroje. Druhý konec připojte do elektrické sítě 220V.
3. Průběh nabíjení signalizuje dioda „Charge“.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Použití přístroje je vždy spojeno s aplikací sonogelu. Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Pokud přístroj používá více osob, je třeba provést dezinfekci povrchu aplikační hlavice. Ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost.

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj není možné zapnout	Baterie je vybita	Baterii nabijte
Přístroj se po pár minutách automaticky vypne	Nízký stav baterie	Baterii nabijte
	Je třeba provést restart	Přístroj vypněte a znovu zapněte
Přístroj není možné nabít	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen	Kabel znovu připojte znovu správně
	Baterie je nabita	Můžete zahájit používání přístroje
Cítím působení ultrazvuku příliš	Pocit vibrací a mírného pískání není závada	Jedná se o průvodní jev

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro ošetření ultrazvukovou kavitací přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehkého, pohodlného.



Jaké opatření je před a po ošetření nutno dodržovat?

Minimálně 4 hodiny před ošetřením nejezte těžká nebo mastná jídla. Doporučujeme lehká jídla (např. zeleninový salát, jogurt). Den před ošetřením, v den ošetření a několik dní po ošetření zvýšte váš pitný režim na 2 až 2,5 litru čisté vody denně. Vyhýbejte se perlivým a slazeným vodám. Týden po ošetření ultrazvukem byste se měli vyvarovat konzumaci alkoholu, kofeinu, nikotinu, těžkých a mastných jídel. Všechny tyto faktory zatěžují vaše játra, která jsou již tak zatížena filtrováním uvolněných tuků z vašeho těla. Další jejich zatížení by mohlo vést k nevolnosti či zhoršení zdravotního stavu. Po ošetření doporučujeme mírně zvýšit pohybovou aktivitu. Podpoříte tím výrazně krevní oběh a celkovou látkovou výměnu. Stimulace krevního oběhu a lymfatického systému podpoří vyplavení uvolněných tuků přirozenou cestou ven z těla.

Bolí ošetření estetickým přístrojem s funkcí ultrazvukové kavitace?

Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné.

Jak poznám, že aplikační hlavice opravdu generuje ultrazvukové vlny?

Během ošetření můžete slyšet slabé pískání, které vydává ultrazvuk. Citliví jedinci mohou cítit jemné mravenčení. Pro ověření funkčnosti ultrazvukových vln naneste drobné množství kapek vody na aplikační hlavici. Ultrazvukové vlny molekuly vody rozkmitají.

Jakých výsledků je možné dosáhnout?

Výsledek je výrazně ovlivněn několika faktory. Uvolněný tuk musí tělo zpracovat. To, jak rychle jej zpracuje, závisí především na rychlosti metabolismu, typu vašeho tuku (zda je prorostlý až do svalové tkáně), stavu lymfatického systému nebo životosprávy. Za optimálních podmínek se může jednat až o několikacentimetrový úbytek po opakovaném ošetření při dodržení výše uvedené životosprávy. Estetický přístroj s funkcí ultrazvukové kavitace vnímejte jako užitečný nástroj, který vám napomůže ve vašem úsilí vypadat lépe. Pro dosažení vysněných cílů je třeba upravit životosprávu a zvýšit pohyb (mluvíme stále o lehké pohybové aktivitě, žádná extrémní fyzická zátěž, na kterou nejste případně zvyklí). Je to důležité, aby procesy, které estetický přístroj ve vašem těle nastartuje, mohly úspěšně a efektivně proběhnout.

Je používání estetického přístroje s ultrazvukovou kavitací bezpečné?

Pokud se přístroj používá na správných partiích a uživatelé neodpovídají některým z uvedených kontraindikací, je ultrazvuková kavitace naprosto bezpečná. Uvolněný tuk je organizmus schopen postupně zpracovat. Výkon je speciálně nastaven tak, aby nedošlo k poškození ostatních buněk a cév. Znovu připomínáme, že je ošetření vždy spojeno se sonogelem. Ultrazvukové vlny se tak mohou na pokožku dostatečně navázat.

Jaké zásady je nezbytné dodržovat, aby se požadovaný hubnoucí účinek dostavil?

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, je nezbytné upravit životosprávu a zvýšit příjem tekutin. Ošetření ultrazvukovou kavitací můžete bez obav podstoupit již po 7 až 10 dnech. Nedoporučujeme ošetření více než dvou partií najednou. Pokud ošetřujete partie, které jsou blíže u sebe, efekt kavitace se násobí. V opačném případě (vzdálenějších partií) se efekt rozdělí. Rozhodně se vždy snažte vyhnout těm částem těla, kde jsou lymfatické uzliny - viz. grafická vizualizace v tomto návodu k obsluze, pasáž: **LYMFATICKÉ UZLINY**. Případný letmý náhodný pohyb nevadí. Aplikační hlavice však nesmí tyto vybrané části přímo stimulovat. Správná funkce lymfatických uzlin a dlouhodobá stimulace pomocí ultrazvukových vln se neslučují.

Jaký je důvod péče o aplikační hlavici po každém použití?

Kontaktní hlavici je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu. Očištěním zabráníte případnému vniknutí do přístroje a zajistíte co nejlepší hygienu provozu.

Může přístroj používat více osob?

Ano. Je to možné, ale za dodržení určitých podmínek. Věnujte zvýšenou pozornost zejména dezinfekci aplikační hlavice. Zabráníte přenosu bakterií či případně kožních chorob. Pro dezinfekci použijte ideálně alkoholový roztok ve spreji. Povrch aplikační hlavice vždy důkladně osušte.

Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?

Doporučená délka použití by neměla přesáhnout 15 minut při ošetření těla a 15 minut pro ošetření obličeje.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních přístrojů. Přístroj neléčí obezitu nebo jakékoliv jiné onemocnění.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Kde se přístroj vyrábí?

Přístroj si necháváme vyrábět v Číně dle našich požadavků a specifikací. Garantujeme standardní záruční i pozáruční servis.

Je přístroj vodotěsný?

Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod tekoucí vodou.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Kosmetický multifunkční přístroj

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BODYFACE SWITCH BR-2240**

EAN 8594166119000

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1: 2017

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1: 2012+A11:2014+A13:2017

EN 62233: 2008

EN 60335-2-23: 2003+A1: 2008+A11: 2010+A2:2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.4.2021

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel