

# NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj  
**BeautyRelax BR-2260**

## COLAGBOOSTER ELEGANCE





## OBSAH:

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ                           | 4  |
| UPOZORNĚNÍ                                                 | 5  |
| ÚČEL POUŽITÍ                                               | 6  |
| KONTRAINDIKACE                                             | 6  |
| HLAVNÍ VÝHODY                                              | 7  |
| CO MŮŽETE OČEKÁVAT                                         | 7  |
| TECHNICKÉ PARAMETRY                                        | 7  |
| OBSAH BALENÍ                                               | 7  |
| SPECIFIKACE PŘÍSTROJE                                      | 8  |
| POUŽITÍ SONOGELU                                           | 8  |
| RADIOFREKVENCE                                             | 9  |
| EMS                                                        | 9  |
| POPIS PŘÍSTROJE                                            | 10 |
| OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE                                         | 11 |
| POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE                             | 12 |
| MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ                       | 13 |
| METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU                            | 14 |
| NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI                              | 15 |
| NABÍJENÍ BATERIE                                           | 16 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA                                           | 16 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 17 |
| CERTIFIKACE                                                | 17 |
| DOVOZCE                                                    | 17 |

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- BeautyRelax COLAGBOOSTER ELEGANCE je přístroj z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod horní vrstvu pokožky. Přístroj není zdravotnický prostředek.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- BeautyRelax COLAGBOOSTER ELEGANCE je certifikován a splňuje všechny evropské normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Ošetření je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Radiofrekvenční vlny a EMS elektrické pulzy získají lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken.
- Při ošetření vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu 1 až 2 sekundy (tzv. razítkováním). Technologie podle typu ošetření pleti působí vždy, když aplikátor přístroje přiložíte k pleti. Začínáte na nejnižší nastavené hodnotě. Postupně můžete přejít i na vyšší úroveň. Ošetření pleti by nikdy nemělo být nesnesitelně bolestivé. Podle toho se snažte přizpůsobit délku kontaktu aplikátoru s pletí. Akceptovatelné je pouze jemné mravenčení až lehké štípnutí. Každá část obličeje by neměla být ošetřena při jednom použití více než dvakrát.
- Pokud budete aplikační hlavici držet na pleti příliš dlouho a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření, přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností.
- Počet opakování ošetření je velice individuální. Záleží na věku a stavu pokožky. Ideální je jednou, maximálně dvakrát do týdne. Pleť a zejména oblast dermis potřebuje čas pro autonomní proces regenerace. Rozhodně neplatí pravidlo - čím častější používání, tím lepší dosažitelné výsledky. Stejně tak neplatí, čím větší výkon, tím rychlejší a lepší výsledek. Pleť každého z nás je orgán s individuálním stupněm citlivosti. Pro někoho může být střední hodnota výkonu již výrazně bolestivá, někdo nemá problém při delším ošetření snést nejvyšší výkon.
- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte aplikační hlavici. Ideální je použití čirého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavice.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)
- Přejeme vám hodně úspěchů ve vašem úsilí ke zdravější a krásnější pleti.  
Tým BeautyRelax.cz



## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## ÚČEL POUŽITÍ

Colagbooster Elegance je kosmetický přístroj pro komplexní ošetření pleti s neinvazivním faceliftingovým efektem. Unikátní kombinace radiofrekvence, EMS a tepla. Určeno pro zralou a povislou pleť. Maximální efekt stimulace kolagenních a elastických vláken. Pravidelné používání udržuje pleť ve skvělé kondici. Zvýšení pružnosti pleti se zaměřením na výrazné vrásky a nerovnosti pleti. Posílení obličejových svalů. Bezpečné použití bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.

## KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arterioskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy



## **HLAVNÍ VÝHODY**

- Neinvazivní ošetření (přístroj neproniká přímo skrz pokožku)
- Ošetření bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Vysoká užitná hodnota přístroje nabízí pro ošetření pouze moderní technologie
- Při pravidelném používání dosažitelné účinky neinvazivní rejuvenace pleti
- Optimalizovaný výkon pro maximální účinek při zachování šetrnosti k pleti

## **CO MŮŽETE OČEKÁVAT**

- Zjemnění hlubokých i jemných mimických vrásek
- Zvýšení pružnosti pleti
- Dosažitelný liftingový efekt
- Vyrovnání jizviček a nerovností pleti
- Zvýraznění charakteristických kontur obličeje
- Potlačení strií a jizviček
- Omlazený a prozářený vzhled

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

- Radiofrekvence: 1MHz
- Teplotní rozsah: až 45°C
- Napájení: vestavěná Li-ion baterie
- Rozměry: 14,3x4,6x5,9cm
- Hmotnost: 290g

## **OBSAH BALENÍ**

- Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2260 COLAGBOOSTER ELEGANCE
- Napájecí adaptér
- Návod k obsluze

## **SPECIFIKACE PŘÍSTROJE**

- Přímé zacílení na remodelaci kolagenových a elastických vláken
- Určeno pro všechny typy pleti bez omezení
- Neinvazivní ošetření (žádná část aplikátoru nepronikne skrz pokožku)
- Opakovatelné ošetření v pohodlí domova
- Samotné ošetření zabere pouhých několik minut
- Skutečně účinné řešení určeno pro zralou a unavenou pleť
- Neinvazivní lifting na stejné úrovni jako v estetickém studiu
- Certifikovaný přístroj
- Speciální konstrukce aplikační hlavice se 3 kontaktními plochami
- Naprosto bezpečné používání při dodržení bezpečnostních doporučení
- Aplikace nezatěžuje žádným způsobem organismus
- Určeno pro obličej, krk a dekolt
- Bezdrátové používání (napájení pomocí nabíjecí baterie)

## **POUŽITÍ SONOGELU**

Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Radiofrekvenční vlny a EMS elektrické pulzy tak mohou do pleti lépe pronikat.





## **RADIOFREKVENCE**

Aplikační hlavice generuje energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.




## **EMS**

Náš obličej je protkaný strukturou svalů. Obličejové svaly jsou zodpovědné za výraz a mimiku. Působením času svaly ztrácí přirozenou pružnost a elasticitu. Plet působí fádním a unaveným dojmem. Aplikační hlavice přístroje Colagbooster Elegance přenáší při kontaktu s pletí jemné elektrické mikropulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily účinné, ale zároveň bezbolestné ošetření obličeje. Dochází ke kontrakci svalů a tím jejich posílení. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Plet má omlazený a prozářený vzhled. To vše neinvazivně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.

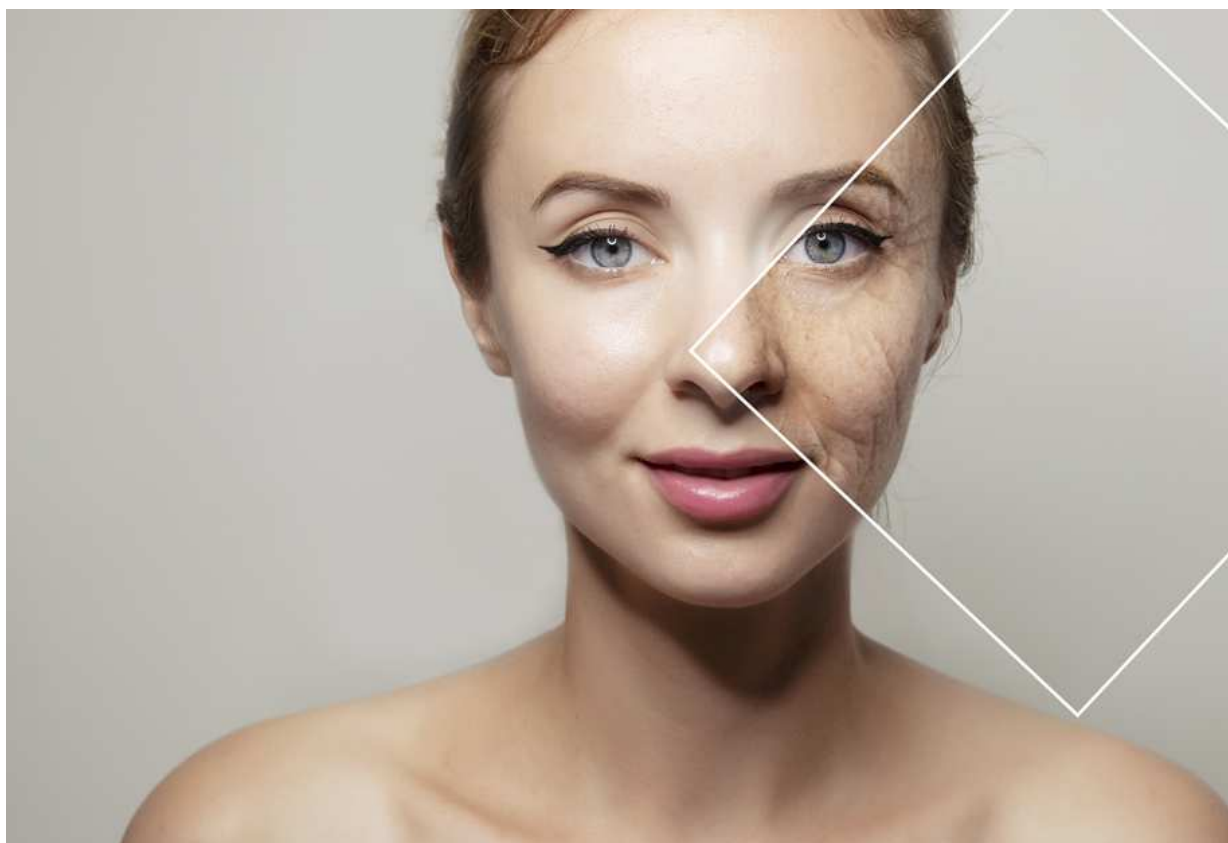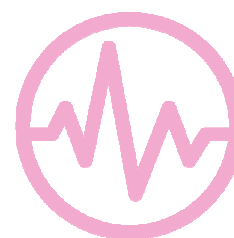

## POPIS PŘÍSTROJE

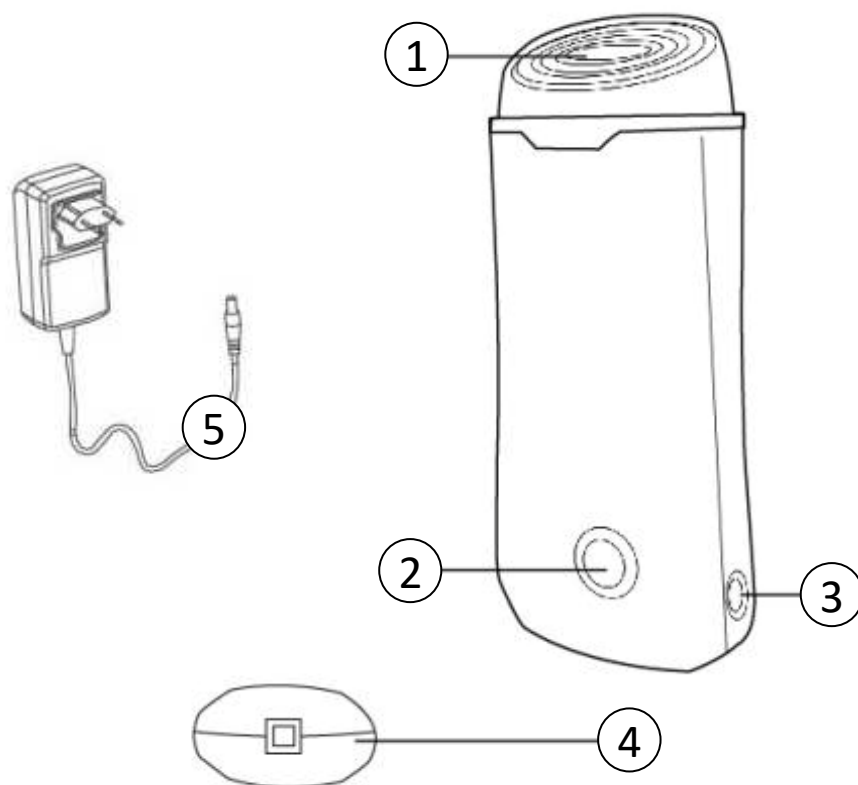

- 1. Aplikační hlavice
- 2. Světelná signalizace úrovně intenzity
- 3. Tlačítko ON/OFF
- 4. Vstup pro napájecí adaptér
- 5. Nabíjecí adaptér

## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před každým použitím je třeba důkladně omýt pokožku. Ideální je načasovat si ošetření po koupeli. Na pleti by se neměl nacházet makeup, nečistoty ani jakékoliv kosmetické přípravky. Pleť by měla být dokonale suchá.
2. Na ošetřovanou partii naneste jemnou vrstvu čirého aplikačního gelu (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikační hlavicí a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavicí. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Přístroj bez pojivé látky mezi pletí a aplikátorem používat nedoporučujeme.
3. Přístroj zapnete stiskem tlačítka **ON/OFF** v délce 2 sekund. Přístroj zahájí činnost s nízkou úrovní intenzity. Světelná signalizace svítí červeně.
4. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete střední úroveň intenzity. Světelná signalizace svítí modře.
5. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete nejvyšší úroveň intenzity. Světelná signalizace svítí fialově.
6. **Červená** = **nízká** intenzita. **Modrá** = **střední** intenzita. **Fialová** = **vysoká** intenzita.
7. Při vyšším výkonu může povrch aplikační hlavičky dosahovat vyšších teplot, než při nižším výkonu. Pokud během používání přístroje dosáhne teplota aplikační hlavičky vysoké teploty, nechte ji vychladnout a pokračujte dále v ošetření. Zahřátí hlavičky není závada. Jedná se o průvodní jev působení radiofrekvence.
8. Ošetřete postupně vybranou část obličeje. Při ošetření vždy postupujte tak, že aplikační hlavičku přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu 1 až 2 sekundy (tzv. razítkováním). Technologie podle typu ošetření pleti působí vždy, když aplikátor přístroje přiložíte k pleti. Začínáte na nejnižší nastavené hodnotě. Intenzitu můžete postupně zvýšit podle pocitu. Ošetření pleti by nikdy nemělo být nesnesitelně bolestivé. Podle toho se snažte přizpůsobit délku kontaktu aplikátoru s pletí. Akceptovatelné je pouze jemné mravenčení až lehké štípnutí.
9. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** přístroj vypnete.
10. Po skončení používání přístroje pleť otřete od sonogelu. Použijte popřípadě krém nebo sprej pro hydrataci pleti. Během spánku bude vaše pleť regenerovat. Hydratace významně přispěje k rychlejšímu průběhu rekonvalescence pleti.

## **POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE**

1. Nastavené režimy ošetření pleti se spustí v okamžiku kontaktu aplikátoru s pletí. V opačném případě zůstává přístroj v pohotovostním režimu.
2. Při používání přístroje se vždy snažte, aby se aplikační hlavice nacházela v plném kontaktu s pletí. Ošetření pleti tak bude maximálně efektivní.
3. Během jednoho ošetření pleti můžete jednotlivé úrovně výkonu střídat. Snažte se zaměřit nejvíce problematické oblasti (jemné vrásky na čele, metličkové vrásky kolem očí, mimické vrásky, zvýraznění kontur, zjemnění linek na krku, atd.). Na oblastech, kde se nachází jemná citlivá pleť, použijte nižší výkon. Na oblastech s vyšší tukovou vrstvou použijte vyšší výkon.
4. **Upozornění:** Při prvním kontaktu s pletí mějte vždy zapnutou nízkou úroveň. Aplikátor přiložte na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již ošetření nepříjemné až mírně bolestivé, nastavte zpět nejnižší úroveň nebo ošetření ukončete.
5. **Tip:** Ošetřená partie by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Radiofrekvence a EMS elektrické pulzy budou mít lepší možnost proniknout do podkožní tkáně.
6. **Doporučení:** Ošetřenou pleť nevystavujte v délce minimálně 3 dnů příliš horké vodě. Pokožka prochází po ošetření stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.

## MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ



## METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

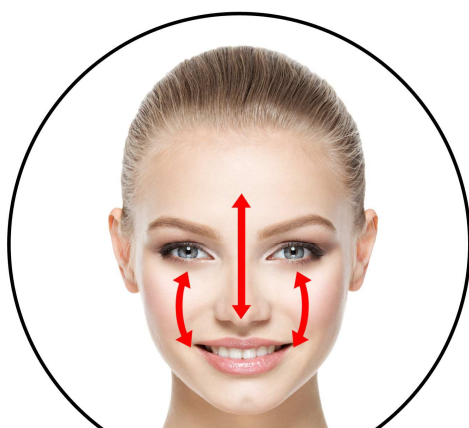

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



**Krk:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

## **NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI**

### **Proč je výrazný cenový rozdíl přístrojů v kosmetických salonech a přístrojích pro domácí použití?**

Hlavním důvodem je rozdílná frekvence používání. Přístroje v kosmetických salonech musí být schopné pracovat nepřetržitě od rána do večera. Tím je kladena zvýšená náročnost na použité materiály a celkovou technologickou koncepci (větší zdroje napájení, větší míra chlazení, atd.) Výkon kosmetických přístrojů pro domácí použití je navržen tak, aby uživateli splnil avizované benefity. Vyšší frekvence použití = dražší výrobní náklady.

### **Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavice?**

Po skončení ošetření mohou na aplikační hlavici ulpět mikroskopické částičky kůže. Očištěním zabráníte jednak jejich případnému vniknutí do přístroje a zajistíte především hygienu provozu.

### **Jak často mohu přístroj používat?**

Vždy záleží na intenzitě, kterou pleť ošetřujete. Je třeba si uvědomit, že při použití vyššího výkonu potřebuje pleť určitý čas na mírnou rekonvalescenci. Přístroj pleť mírně vysušuje. Po každé aplikaci použijte nejlépe ještě hydratační krém nebo mast, aby byla pokožka stále hydratovaná.

### **Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?**

Doporučená délka individuálního ošetření je v rozsahu od 10 do 15 minut.

### **Existují nějaké kontraindikace? (situace, kdy nelze přístroj používat)**

Přístroj BeautyRelax BR-2260 COLAGBOOSTER ELEGANCE je určen pro všechny typy pleti bez věkového omezení uživatele. Přístroj není vhodné používat, pokud trpí uživatel vážným kožním onemocněním. Viz. seznam kontraindikací v úvodu návodu.

### **Je přístroj zdravotnický prostředek?**

Nikoliv. Přístroj neslouží pro léčbu závažných kožních onemocnění. Přístroj NELEČÍ: aktinickou keratózu, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitidu lupénku.

### **Jak postupovat, když baterie ztratí po delší době kapacitu?**

Pokud se postupem času kapacita baterie výrazně sníží, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz Zašleme informace, jakým způsobem lze výměnu baterie řešit.

### **Má přístroj nějakou certifikaci?**

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu.

### **Kde se přístroj vyrábí?**

Přístroj si necháváme vyrábět v Číně dle našich požadavků a specifikací. Garantujeme standardní záruční i pozáruční servis.

### **Může přístroj používat více osob?**

Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce aplikační hlavice, druhá osoba přístroj použít může.

**Jaké kosmetické přípravky kombinovat během ošetření přístrojem BeautyRelax COLAGBOOSTER ELEGANCE?**

Během samotného ošetření je doporučeno používat klasický čirý sonogel. Při použití kosmetických přípravků nebo sér jiného složení, může ošetření v kombinaci s radiofrekvencí vyvolat na pleti alergickou reakci v případě, že je vaše pleť citlivější. Použití kosmetických přípravků je ideální po skončení ošetření, kdy je třeba pleť dostatečně hydratovat.

**Jaké části těla lze přístrojem ošetřit?**

Přístroj je určen pro ošetření oblasti obličeje, krku a popřípadě dekoltu.

## **NABÍJENÍ BATERIE**

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii.

**Postup nabíjení:**

1. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí adaptér, který je součástí balení.
2. Jeden konec kabelu zapojte do vstupu pro napájení přístroje.
3. Průběh a konec nabíjení signalizuje červená světelná signalizace.
4. Jakmile je baterie plně nabitá, světelná signalizace svítí modře.
5. Nabíjení může trvat až 3 hodiny v závislosti na stavu baterie.
6. Výdrž baterie se odvíjí od používané intenzity ošetření. Průměrná výdrž baterie se pohybuje kolem 1 hodiny.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampóněk nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu kontaktní plochy hlavice.

## **LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## **CERTIFIKACE**



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## **DOVOZCE**

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**