

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj **BeautyRelax BR-2831**

EMSROLLER FACE&BODY



OBSAH:

| | |
|--------------------------------------|----|
| UPOZORNĚNÍ | 4 |
| KONTRAINDIKACE | 5 |
| POUŽITÍ SONOGELU | 5 |
| PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE | 7 |
| DOSAŽITELNÉ ÚČINKY | 8 |
| OBSAH BALENÍ | 9 |
| TECHNICKÉ PARAMETRY | 9 |
| RADIOFREKVENCE | 10 |
| EMS PULZNÍ TERAPIE | 10 |
| ZAMĚŘENÍ NA CELULITIDU | 10 |
| POPIS PŘÍSTROJE | 11 |
| OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE | 12 |
| POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE | 13 |
| OTOČNÁ APLIKAČNÍ HLAVICE | 15 |
| PŘÍKLADY POUŽITÍ PŘÍSTROJE | 18 |
| DALŠÍ MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE | 19 |
| ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ | 20 |
| NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI | 21 |
| NABÍJENÍ BATERIE | 22 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA | 22 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ | 23 |
| CERTIFIKACE | 23 |
| DOVOZCE | 23 |
| ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ | 24 |

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (v místě použití přístroje)
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách nebo v oblasti štítné žlázy



POUŽITÍ SONOGELU


Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Aplikální gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikální hlavici. Určitě s ním během používání přístroje nešetřete. Užití aplikálního gelu je nezbytné. EMS pulzy a radiofrekvence se tak mohou na pleť lépe navázat. Použít můžete i jiné přípravky na vodní bázi.





PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Kosmetický přístroj BeautyRelax Emsroller Face&Body je určen pro zvýšení pružnosti pleti. Využívá k tomu moderní pokročilé technologie: radiofrekvenci a EMS pulzy. Duální použití na obličej a tělo. Posílení svalů. Aktivní podpora tvorby kolagenu. Potlačení projevů celulitidy. Aplikační válečky se přizpůsobí všem záhybům pleti. Bezdrátové použití pomocí nabíjecí baterie. Možnost nastavení 3 úrovní intenzity pro každý režim použití.

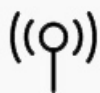

**EMS
MIKROPULZY**



**OTOČNÉ
HLAVICE**



**OPTIMÁLNÍ
ÚHEL HLAVIC 70°**



**ZAPRACOVÁNÍ
PŘÍPRAVKŮ**



**LIFTING
PLETI**



**KOMPAKTNÍ
ROZMĚRY**

DOSAŽITELNÉ ÚČINKY

- Povadlá a nezdravě vyhlížející pleť
- Zvýšení pružnosti kontur obličeje
- Výrazné nerovnosti pleti způsobené věkem

4D MASÁŽ **DVA OTOČNÉ APLIKÁTORY 360°**



OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax Emsroller Face&Body BR-2831
- Nabíjecí stojánek
- Napájecí USB kabel
- Návod k obsluze

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napětí: 5V
- Výkon: 2,5W
- Napájení: nabíjecí li-ion baterie
- Rozměry: 18x7,5x8,5cm
- Hmotnost: 200g



RADIOFREKVENCE

Válečky generují energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.



EMS PULZNÍ TERAPIE

Válečky při kontaktu s pleť přenáší jemné elektrické pulzy. Elektrické pulzy pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Pleť má omlazený a prozářený vzhled.




ZAMĚŘENÍ NA CELULITIDU

Celulitida se projevuje hrbolatým povrchem pokožky. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti stehen a hýždí. Celulitidu, tzv. pomerančovou kůži, způsobuje zvětšení objemu tukových buněk. Na pokožce se projevuje nevhlednými drolíčky. BeautyRelax Emsroller Face&Body dvou válečků intenzivně a hloubkově masíruje pokožku. Tímto procesem se podporuje krevní oběh a průtok lymfy. Dochází tak k lepší látkové výměně, což má za následek zmírnění projevů celulitidy. Pleť je hladší a pružnější.

Ideální na použití problematických partií, mezi které patří vnitřní strany stehen, boky, zadeček, břicho a paže. Doporučujeme kombinovat použití přístroje s anticelulitidními krémy nebo masážními esenciálními oleji. Pohyb přístroje po pokožce bude snadnější a výsledný efekt hladké pokožky se dostaví rychleji. V kombinaci s aktivním pohybem a zdravou stravou lze výsledek nejen urychlit, ale také dlouhodobě udržet. Praktické je ergonomické tvarování rukojeti. Přístroj se tak lépe drží při jeho používání.



POPIS PŘÍSTROJE

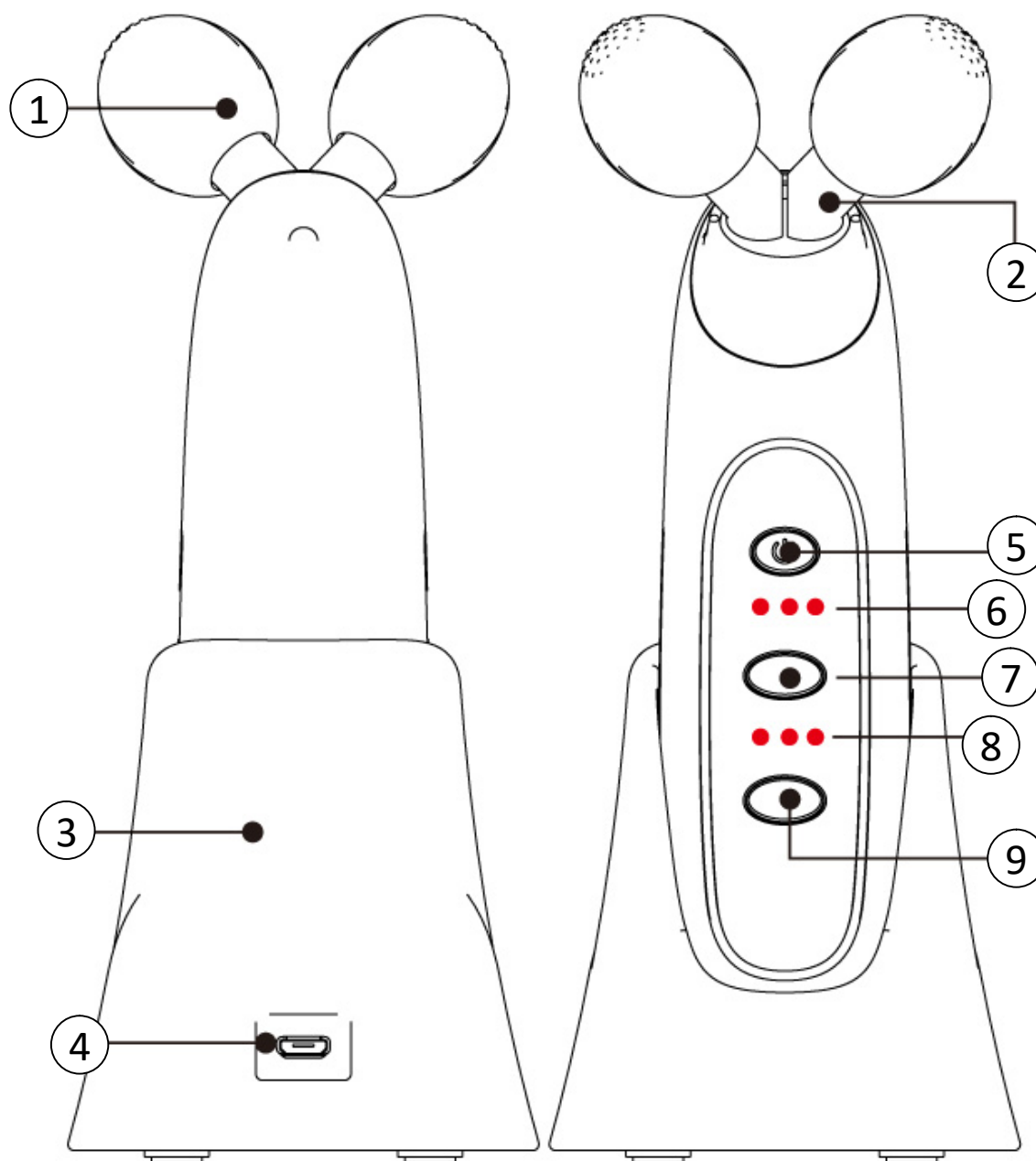

1. Masážní válečky
2. Otočná hlavice o 180°
3. Nabíjecí stojánek
4. Vstup pro napájecí USB kabel
5. Tlačítko **ON/OFF**

6. Indikace intenzity pro režim **FACE**
7. Tlačítko **FACE**
8. Indikace intenzity pro režim **BODY**
9. Tlačítko **BODY**

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Před každým použitím je třeba důkladně omýt pokožku a osušit. Ideální je načasovat si ošetření po koupeli. Póry jsou po horké koupeli otevřeny. Pokožka je vláčnější.
- 2.** Na ošetřovanou partii naneste tenkou vrstvu čírého aplikačního gelu. Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikační hlavicí a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavicí. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Přístroj bez pojivé látky mezi pletí a aplikátorem nedoporučujeme. Použít můžete váš oblíbený kosmetický přípravek vyrobený na vodní bázi.
- 3.** Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Zapnutí přístroje doprovází zvuková signalizace.
- 4.** Po zapnutí přístroje se rozsvítí podsvícení nápisu **FACE**. Výchozí hodnota intenzity je nastavena na úrovni 1. Pomocí tlačítka **FACE** si můžete měnit intenzitu ošetření pleti. K dispozici jsou tři úrovně - nízká, střední a vysoká. Nastavenou úroveň intenzity signalizuje počet červených teček (1 = nízká, 2 = střední a 3 = vysoká). Zvolte si takovou intenzitu, která je vám při použití na pleti nejvíce příjemná.
- 5.** Stisknutím tlačítka **BODY** se přepnete do dalšího režimu použití přístroje. Výchozí hodnota intenzity je nastavena na úrovni 1. Pomocí tlačítka **BODY** si můžete měnit intenzitu ošetření pleti. K dispozici jsou tři úrovně - nízká, střední a vysoká. Nastavenou úroveň intenzity signalizuje počet červených teček (1 = nízká, 2 = střední a 3 = vysoká). Zvolte si takovou intenzitu, která je vám při použití na pleti nejvíce příjemná.
- 6.** V praxi má přístroj celkem 6 úrovní intenzity. 3 úrovně v režimu **FACE** a 3 úrovně v režimu **BODY**. Technologie jsou v obou režimech použití přístroje stejné. Rozdíl je pouze v intenzitě ošetření pleti. Úrovně v režimu **BODY** dosahují většího výkonu, než v režimu **FACE**. Pokud snese vaše pleť v oblasti obličeje vyšší hodnoty výkonu, bez problému používejte pro obličej režim **BODY**. Vždy je třeba vycházet z nastaveného výkonu. Aby vám působení technologií na pleti nebylo nepříjemné.
- 7.** Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout. Vypnutí je doprovázeno zvukovou signalizací.

Tip 1: Po pleti se pohybujte vždy pomalu.

Tip 2: Při ošetření dbejte na to, aby byly v kontaktu s pletí vždy oba válečky.


POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Pokud se rozhodnete pro ošetření přístrojem větší části obličeje, krku nebo dekoltu, doporučujeme nanášet sonogel po částech. Přestože má kontaktní gel skvělé hydratační schopnosti, může po nějakém čase postupně vysychat.
- 2.** Při použití přístroje mějte vždy obě masážní hlavice v kontaktu s pletí. Pouze tak mohou radiofrekvence a EMS pulzy efektivně navázat na plet.
- 3.** Pokud je vám působení přístroje na konkrétním místě na pleti nepříjemné i při nejnižší úrovni intenzity, snižte množství sonogelu, zkrátte čas kontaktu aplikační hlavice s pletí nebo se tomuto místu úplně vyhněte.
- 4.** Během jednoho ošetření pleti můžete jednotlivé programy - módy postupně střídat. Snažte se zaměřit nejvíce problematické oblasti (jemné vrásky na čele, metličkové vrásky kolem očí, mimické vrásky, zvýraznění kontur, zjemnění linek na krku, vybrané partie těla, atd.)
- 5. Upozornění:** Při prvním kontaktu s pletí mějte vždy zapnutou nízkou úroveň intenzity 1. Válečkové aplikátory použijte nejprve na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle intenzity můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již ošetření nepříjemné až mírně bolestivé, nastavte zpět nejnižší úroveň intenzity 1 nebo ošetření ukončete.
- 6. Tip:** Ošetřená partie by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Technologie radiofrekvence a EMS pulzů tak bude mít lepší možnost navázat se na povrch pleti.
- 7. Doporučení:** Ošetřenou plet' nevystavujte v průběhu následujících několika hodin příliš horké vodě. Pokuste se vyhnout návštěvě sauny. Pokožka prochází po ošetření stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se plet' zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte plet' vychladnout.




OTOČNÁ APLIKAČNÍ HLAVICE


180°

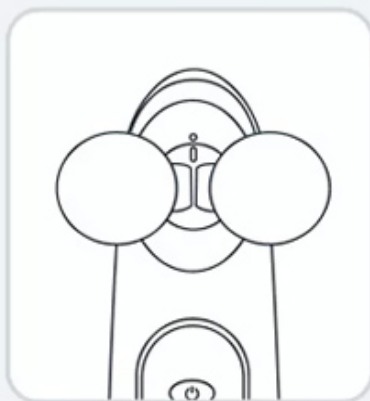

45°

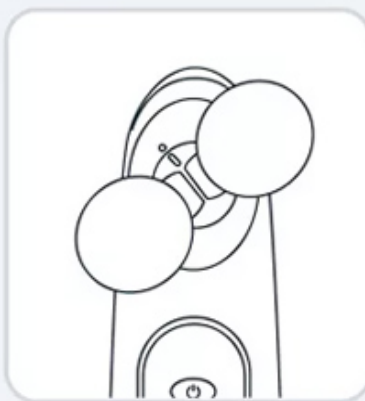

90°

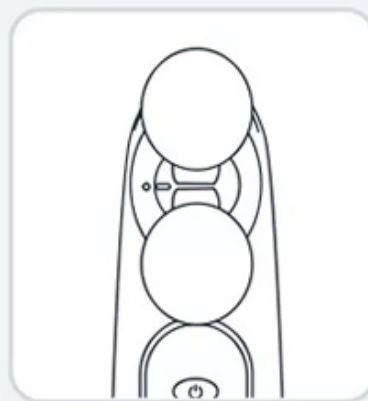


OTOČNÁ APLIKAČNÍ HLAVICE

Aplikační hlavice je otočná celkem v úhlu 180°. Díky úpravě polohy hlavice se vám bude přístroj lépe používat na vybraných partiích obličeje a těla. Hlavici si vždy nastavte tak, aby se při použití oba válečky nacházely v co nejlepším kontaktu s pletí.

Aplikační hlavice se může nacházet v celkem 5 pozicích. Pro otočení uchopte celou hlavici a mírně zdvihněte. Nyní můžete s hlavicí po úhlu 45° postupně otáčet. Při nastavení aplikační hlavice postupujte následovně:


1.

Hlavici mírně zdvihněte.

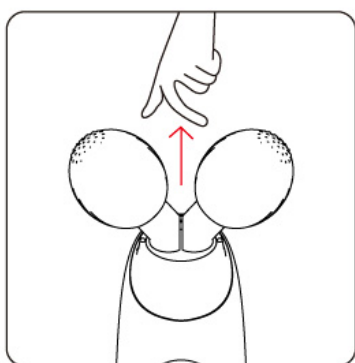


2.

Otočte do požadované pozice.

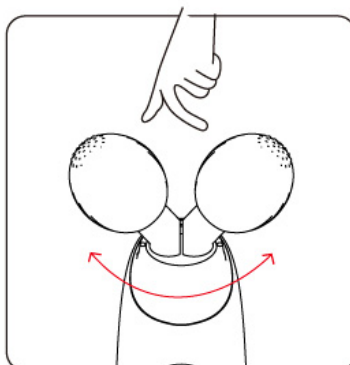


3.

Hlavici pusťte nazpět dolů.

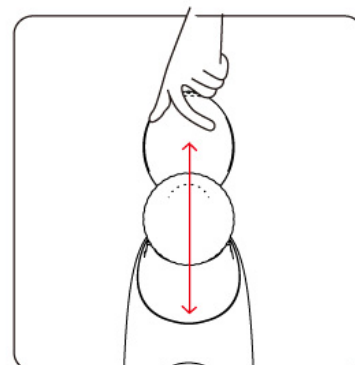


Aplikační hlavici můžete postupným pootáčením nastavit do následujících pěti poloh:


1.

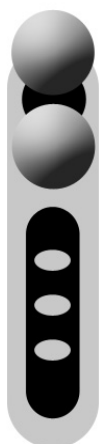


2.

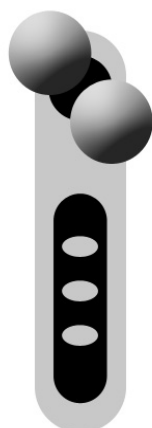

3.

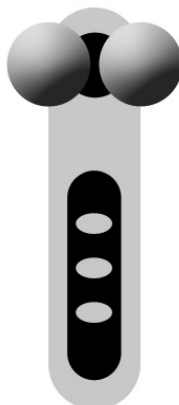

4.

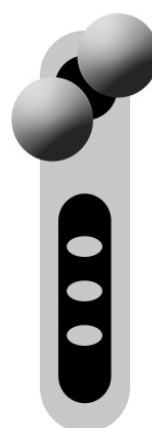

5.







PŘÍKLADY POUŽITÍ PŘÍSTROJE




1. Ošetření tváře




2. Ošetření brady




3. Ošetření krku

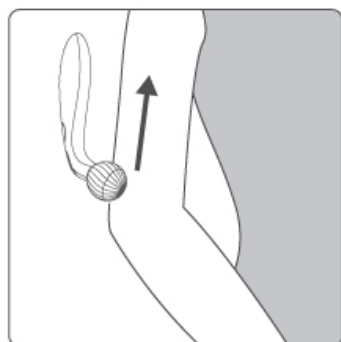




4. Ošetření paže

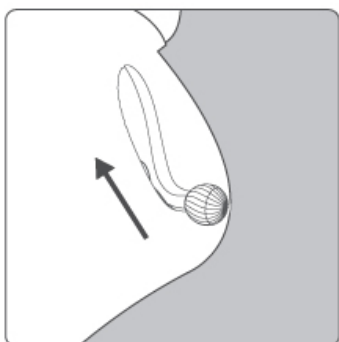


5. Ošetření pasu

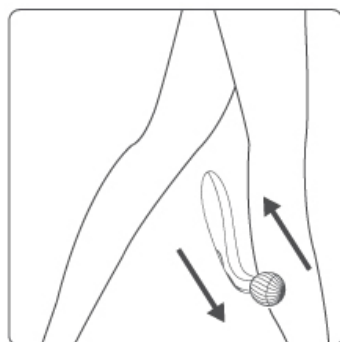

6. Ošetření nohou

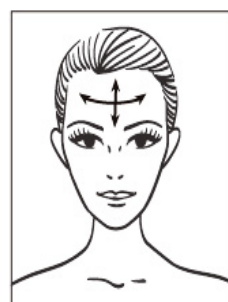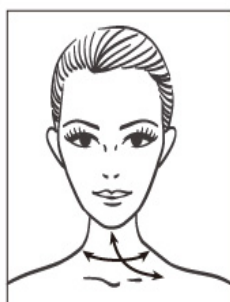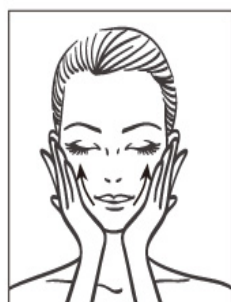

**Možnosti použití
obličej/krk/dekolt/tělo**

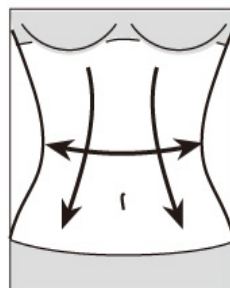

DALŠÍ MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

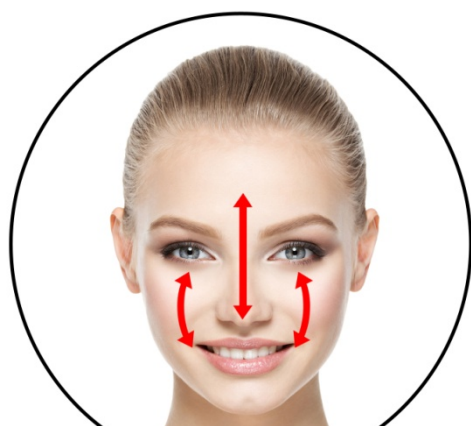

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

| Problém | Možná příčina | Řešení |
|---|--|--|
| Přístroj nejde zapnout. | Tlačítko ON/OFF není stisknuto dostatečně dlouho. | Tlačítko ON/OFF podržte v délce pár sekund. |
| | Přístroj je vložený do nabíjecího stojánu s USB kabelem. | Před použitím přístroje vyjměte přístroj z nabíjecího stojánu. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte. |
| | Baterie je vybitá. | Baterii přístroje před použitím dostatečně nabijte. |
| Problém s nabíjením. | Nabíjecí stojánek a USB port notebooku nebo počítače není dostatečně propojen. | Ověřte pevnost zapojení USB kabelu do stojánu a zdířky USB portu počítače nebo notebooku. |
| | Nabíjecí kabel je poškozen. | Vyměňte nabíjecí kabel za nový. |
| Působení elektrických mikropulzů je příliš silné. | Úroveň intenzity je příliš silná. | Snižte úroveň intenzity na hodnotu 1. |
| | Sonogel je na pleti v příliš malém množství nebo vůbec. | Aplikujte na pleť větší množství gelu pro zvýšení vodivosti pleti. |



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak poznám, že EMS pulzy a radiofrekvence jsou skutečně zapnuté a pracují správně?

Působení EMS pulzů ucítíte jako mravenčení. Přesně v ten moment jsou stimulovány všechny struktury jemných mimických vrásek. Pulzy stimulují kolagenní a elastická vlákna pokožky. Intenzita vnímání mravenčení závisí na úrovni intenzity, kterou máte nastavenou. Vždy začínejte od nejnižší hodnoty 1 a přidávejte postupně. Působení radiofrekvence je možné vnímat jako mírné teplo. Pocitově ho můžete nejvíce vnímat, pokud stojíte s masážními válečky na jednom místě.

S přístrojem se pohybuji po pleti a necítím žádné pulzy. Je to v pořádku?

Působení elektrických mikropulzů je velmi subjektivní a individuální. Závisí na více faktorech. Vnímání elektrických pulzů je slabší, pokud máte na ošetřované partii silnější tukovou vrstvu. Příčina může spočívat v malém množství vodivého sonogelu na pleti. Během používání můžete také změnit úhel úchopu přístroje nebo pozice natočení aplikační hlavice.

Jak zvolit správnou intenzitu funkce EMS?

Přístroj nabízí celkem 3 úrovně intenzity výkonu. Každý uživatel může mít jiné množství podkožního tuku. Tuk funguje jako odpor. Pleť může být navíc na různých místech různě citlivá. Hodnoty výkonu jsou v režimu **FACE** nižší, než v režimu **BODY**. Neplatí, abyste striktně používali režim **FACE** pro obličej, krk, dekolt nebo **BODY** pro vybrané části těla. Nastavte si takovou intenzitu výkonu, která je vám v průběhu používání přístroje příjemná.

Jaké množství kontaktního gelu musím použít?

Použijte takové množství, aby se válečky přístroje po povrchu pleti snadno pohybovaly. Ze začátku používání přístroje dávkujte sonogel od menšího množství po větší. V praxi si vyzkoušíte, co vám při použití nejvíce vyhovuje.

Mohu přístroj používat, pokud mám na pleti make-up?

Před každým použitím přístroje vždy odstraňte všechny zbytky make-upu. Vytvářel by překážku mezi masážními válečky a pletí. Elektrické mikropulzy a radiofrekvence by tak nemohly dostatečně proniknout do pleti.

Jak často a dlouho přístroj používat?

V této oblasti není žádné výrazné omezení. Optimální délka ošetření by se měla pohybovat mezi 15 až 20 minutami. Lze každý den během odpočinku nebo sledování televize. Ráno před použitím make-upu nebo večer před spaním. Pokud je při vyšším výkonu pleť více podrážděna, před dalším použitím přístroje si udělejte den a dva pauzu. Délka použití přístroje se odvíjí také od vaší šikovnosti. Vždy je třeba vycházet z toho, abyste přístrojem plně pokryli vybranou plochu pleti.

Je přístroj náročný na údržbu?

Po každém ošetření pleti věnujte pozornost zejména aplikačním válečkům. Vždy dbejte na to, aby se na nich nenacházely zbytky vlhkosti. Jednou za čas použijte líh k maximální dezinfekci.

Kdy mohu očekávat nějaké výsledky?

Rychlost docílení příznivých účinků přístroje jsou velice individuální. Záleží na mnoha faktorech: míra podkožního tuku, věk, pohlaví. K dosažení výsledků je nezbytná kontinuita přístrojového ošetření. Díky kompaktní velikosti přístroje ho sebou můžete mít i na cestách. Snažte se, aby se přístroj stal běžnou součástí vašeho každodenního rituálu péče o pleť.

Je používání v některých případech zakázáno?

Jsou situace, kdy používání přístroje není doporučeno. Následujte pasáž v tomto návodu k obsluze s názvem kontraindikace.

Je přístroj vodotěsný?

Není. Žádnou část přístroje nevkládejte pod tekoucí proud vody. Masážní válečky vždy po použití přístroje pečlivě vysušte.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Baterie přístroje se nabíjí bezdrátově pomocí stojánku. Nabíjecí kabel je součástí balení. Jeden konec kabelu připojte ke stojánku. Druhý konec zapojte do USB portu počítače nebo notebooku.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. V průběhu nabíjení svítí červená světelná signalizace.
3. Kontakty na přístroji a stojánku musí být vždy v plném kontaktu pro správné nabíjení baterie.
4. Jakmile je baterie nabitá, světelná signalizace se změní na zelenou barvu.
5. Délka nabíjení se odvíjí od stavu baterie a její kondice.



Nabíjecí kabel nepřipojujte k žádnému typu adaptéru do sítě 220V. Mohlo by dojít k poškození přístroje. Pro nabíjení používejte vždy USB port počítače nebo notebooku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byly aplikátory dostatečně očištěny. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu válečkových aplikátorů.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj na obličej a tělo

BeautyRelax EMSROLLER FACE&BODY

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2831**

EAN: **8594166120488**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.




SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 10.9.2022