

# NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj **BeautyRelax BR-2060P**

## EYEPEN EMS





## OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
AUTOMATICKÉ PROGRAMY	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
VIBRACE	7
EMS	7
FOTONOVÉ SVĚTLO	7
TEPELNÁ TERAPIE	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POPIS DISPLEJE	9
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	10
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	11
DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST	12
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	13
NABÍJENÍ BATERIE	14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	14
CERTIFIKACE	14
DOVOZCE	14

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný ani vododěsný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nese distributor odpovědnost.



## OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2060 EYEPEN EMS.
- Napájecí USB kabel.
- Návod k obsluze.

## KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



## **HLAVNÍ VÝHODY**

- Kombinuje EMS elektrické pulzy, červené světlo, vibrace a vyhřívání
- 3 úrovně nastavení intenzity působení elektrických mikropulzů
- Přímé zacílení na oblast kolem očí
- Potlačení tmavých kruhů
- Zmírňuje otoky a s tím související svalovou tenzi
- Podporuje zvýšení pružnosti pleti
- Eliminuje mimické a jemné vlásečnicové vrásky
- Napomáhá zapracovat kosmetické krémy
- Velmi snadné ošetření pleti díky oválnému tvaru aplikátoru
- Aplikační hlavice vyrobena z nerez oceli
- Použití vhodné pro všechny typy pleti
- Praktický displej
- Indikace stavu baterie

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

- Vyhřívání: 45°C
- Vlnová délka červeného světla: 620nm
- Počet módů použití: 3
- Intenzita působení elektrickými pulzy: 3 úrovně
- Výkon: 1,8W
- Napájení: nabíjecí baterie Li-ion 500mAh
- Nabíjení: pomocí USB kabelu (součástí balení)
- Rozměry: 16x3x2cm
- Hmotnost: 120g

## **AUTOMATICKÉ PROGRAMY**


1. REŽIM RELAXACE: vibrační mikromasáž + působení tepla
2. REŽIM BEAUTY: vibrační mikromasáž + červené světlo
3. REŽIM EMS: EMS + červené světlo

## PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Eyepen EMS je moderní kosmetická pomůcka s vysokou přidanou hodnotou. Kombinuje technologie, které jsou přímo zacíleny na regeneraci oblasti kolem očí. Určeno pro zmírnění otoků, potlačení tmavých kruhů pod očima a zvýšení pružnosti pleti. Napomáhá výrazným způsobem zapracovat kosmetické krémy. 3 automatické programy kombinují EMS elektrické pulzy, červené světlo, vibrační mikromasáž a vyhřívání. Bezdrátové pohodlné používání díky zabudované nabíjecí baterii. Produkt snadno vložíte do kabelky díky kompaktním rozměrům. Protáhlý úzký tvar zajišťuje snadné používání s přesným zacílením aplikační hlavice na problematická místa pleti.

## VIBRACE

Správná funkce lymfatického systému platí nejen pro tělesné končetiny, ale také pro náš obličej. Pokud máme lymfu a krevní oběh v pořádku, odvod nečistot z krve probíhá násobně lepším způsobem. Zlepšení krevního oběhu = stimulace lymfatického systému = lepší odvod nečistot a škodlivin z těla = krásná a zdravá pleť. Jednoduchá rovnice, která platí nejen pro obličej, ale pro celé naše tělo. Jemná vibrační masáž patří z technologického hlediska mezi nejjednodušší, ale zároveň velmi účinnou techniku ošetření pleti.

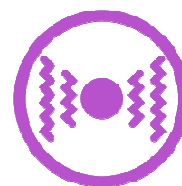


## EMS

Náš obličej je protkaný strukturou svalů. Obličejové svaly jsou zodpovědné za výraz a mimiku. Působením času svaly ztrácí přirozenou pružnost a elasticitu. Pleť působí fádním a unaveným dojmem. Aplikační hlavice přenáší při kontaktu s pleť jemné elektrické mikropulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily účinné, ale zároveň bezbolestné ošetření obličeje. Dochází ke kontrakci svalů a tím jejich posílení. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. To vše neinvazivně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.




## FOTONOVÉ SVĚTLO

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni. BeautyRelax EYEPEN EMS nabízí funkci červeného světla s vlnovou délkou 620nm.

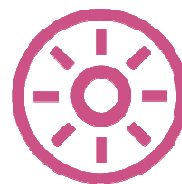

## TEPELNÁ TERAPIE

Hlavním účinkem působení tepla na pleť je otevření kožních pórů. V kosmetickém studiu se po odličení pleti používá právě tento krok. Ať již následuje jakákoliv další procedura. Roztažení kožních pórů je elementární základ pro hloubkové vyčištění pleti. Dále jsou póry schopny absorbovat výživové látky z kosmetických přípravků hlouběji do pokožky. Kosmetičky používají nejčastěji napařený ručník. Vy jako skutečný profesionál kosmetický přístroj BeautyRelax.

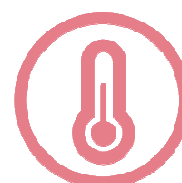

## POPIS PŘÍSTROJE




1. Aplikační hlavice
2. LED světla fotonové terapie
3. Displej
4. Tlačítko ON/OFF
5. Vstup pro napájecí kabel
6. Vodící pásy na bočních stranách

**Poznámka:** Aplikační hlavice je určena pro oboustranné použití. Na jedné straně využijete účinky EMS elektrických pulzů, fotonového světla a tepla. Druhá hladká strana je určena pro mechanickou masáž v režimu působení vibrací.



## POPIS DISPLEJE

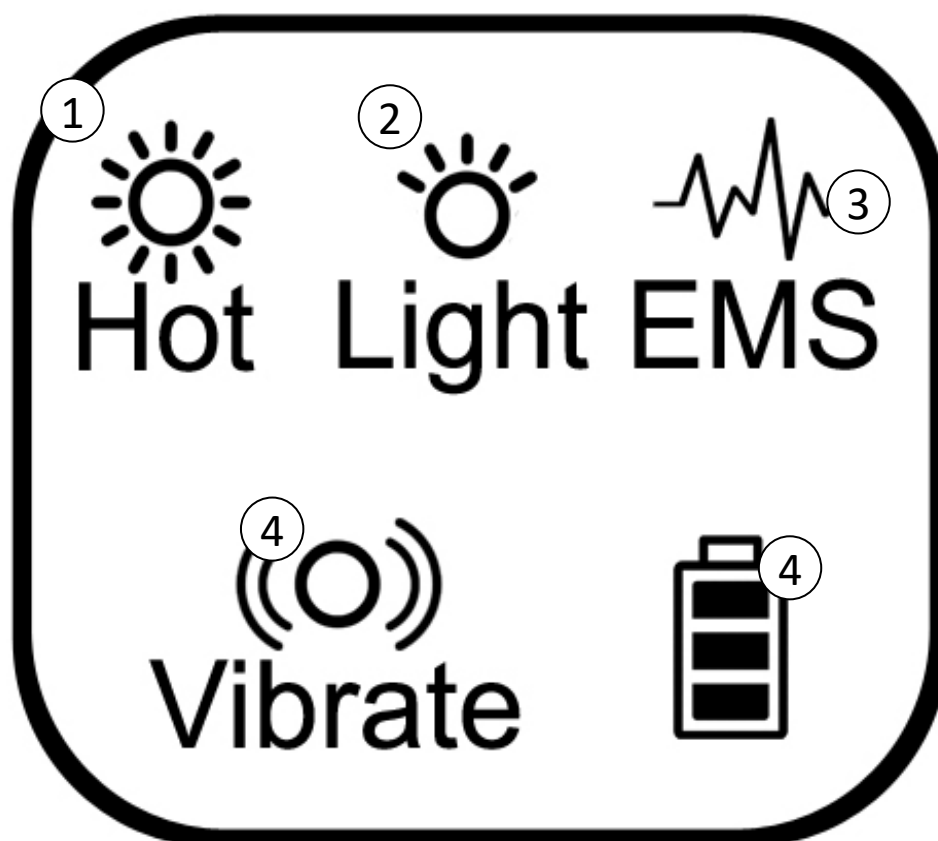

1. Tepelná terapie
2. Fotonové světlo
3. EMS elektrické pulzy
4. Vibrační masáž
5. Indikace stavu baterie

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka **ON/OFF (4)**.
2. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF (4)** si můžete aktivovat režim ošetření pleti podle následujícího diagramu:

<b>REŽIM RELAXACE</b> Vibrace + tepelná terapie	①	 + 
<b>REŽIM BEAUTY</b> Vibrace + fotonové světlo	②	 + 
<b>REŽIM EMS</b> EMS elektrické pulzy + fotonové světlo	③	 + 

3. V režimu 3 si můžete nastavit působení elektrických pulzů EMS. K dispozici jsou tři úrovně výkonu.



### ÚROVEŇ 1

Nízká úroveň intenzity elektrických pulzů EMS



### ÚROVEŇ 2

Střední úroveň intenzity elektrických pulzů EMS



### ÚROVEŇ 3

Vysoká úroveň intenzity elektrických pulzů EMS

4. Jednotlivé režimy ošetření pleti a intenzitu si můžete nastavit pomocí tlačítka **ON/OFF (4)**.  
Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF (4)** přístroj vypnete.


## **POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE**

1. Funkce elektrických pulzů EMS funguje pouze v případě, kdy při držení přístroje jsou vaše prsty v kontaktu s vodícími pásky na bočních stranách přístroje. V opačném případě aplikační hlavice nebude elektrické pulzy generovat. Při kontaktu prstů s vodícími pásky se uzavře okruh mezi vámi a přístrojem. Tímto způsobem tak můžete ošetřit pouze sami sebe. Pokud se pokusíte ošetřit pleť druhé osoby, EMS elektrické pulzy nebudou fungovat.
2. Při zahájení ošetření pleti pomocí funkce EMS je doporučeno nastavit nejnižší výkon – ÚROVEŇ 1 a přidávat postupně. Každý uživatel má odlišnou citlivost pleti.
3. Během působení funkce EMS můžete cítit jemné mravenčení. Nejedná se o závadu, ale průvodní jev elektrických pulzů.
4. Pro správnou funkčnost režimu EMS je nezbytné zvýšit vodivost pleti pomocí sonogelu nebo jiného kosmetického přípravku na vodní bázi. Obecně platí, že lepší jsou látky bez přidaných barviv nebo aromat, které by mohly citlivou pokožku podráždit. Je třeba si vyzkoušet, jaký typ přípravku vaše pleť snáší nejlépe.
5. V režimu působení vibrací můžete účinně zapracovat kosmetické krémy či séra. Pro tento způsob ošetření pleti je doporučenou použít hladkou (nekovovou) část hlavice.
6. V průběhu ošetření obličeje se snažte vyhnout oblasti spánků a dbejte zvýšenou pozornost při ošetření očního okolí. V oblasti kolem očí je pokožka velmi tenká a citlivá.
7. Jednotlivé automatické programy můžete během jednoho ošetření pleti vzájemně kombinovat. Není však nezbytně nutné použít za všech okolností všechny programy. Každý přednastavený program má různé účinky na pleť.
8. Při použití fotonového LED světla se nedívejte přímým pohledem na zdroj světla. Použití přístroje nevyžaduje žádné ochranné brýle. Pouze se snažte vyhnout dlouhému přímému pohledu na světlo. Z dlouhodobého hlediska tím chráníte svůj zrak.
9. Pokud chcete funkci EMS použít maximálně efektivně, během ošetření se snažte, aby byla celá aplikační kovová hlavice v plném kontaktu s pletí.

10. Kosmetický přístroj je vhodný pro ošetření celého obličeje. Vynikajících výsledků lze docílit zejména v oblasti očního okolí. Působení tepla, červeného světla a EMS pulzů může výrazně potlačit tmavé kruhy pod očima. Významně podpoří krevní oběh. Stimulací obličejových svalů zlepšuje celkovou pružnost pleti.



## **DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST**

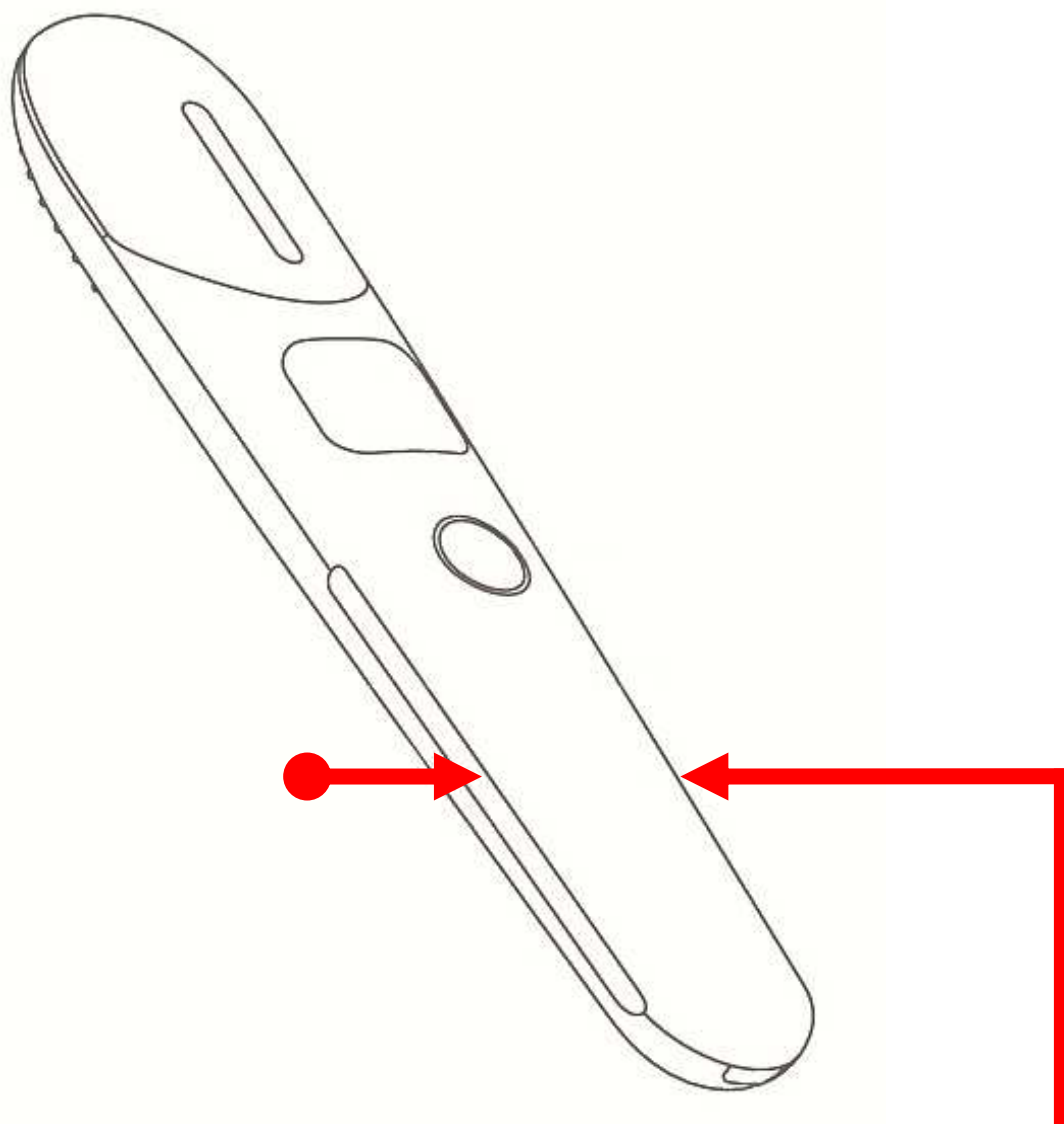

**Funkce elektrických pulzů EMS funguje pouze v případě, kdy při držení přístroje jsou vaše prsty v kontaktu s vodícími pásky na bočních stranách přístroje. V opačném případě aplikační hlavice nebude elektrické pulzy generovat. Při kontaktu prstů s vodícími pásky se uzavře okruh mezi vámi a přístrojem. Tímto způsobem tak můžete ošetřit pouze sami sebe. Pokud se pokusíte ošetřit pleť druhé osoby, EMS elektrické pulzy nebudou fungovat!**

## METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

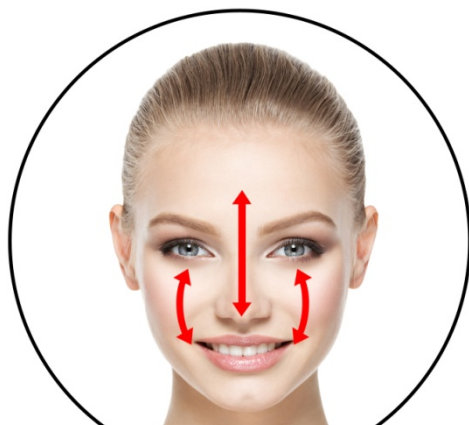

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



**Krk:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

## NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Nízký stav baterie signalizuje blikající symbol baterie na displeji.

### **Postup nabíjení:**

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Nabíjení může trvat až 2 hodiny v závislosti na kondici baterie.
4. Průběh nabíjení signalizuje blikající symbol baterie na displeji. Jakmile blikání ustane, baterie je plně nabitá.

**Upozornění:** Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737 196 160

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**