


NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj **BeautyRelax BR-2050**

EYEPEN HEAT

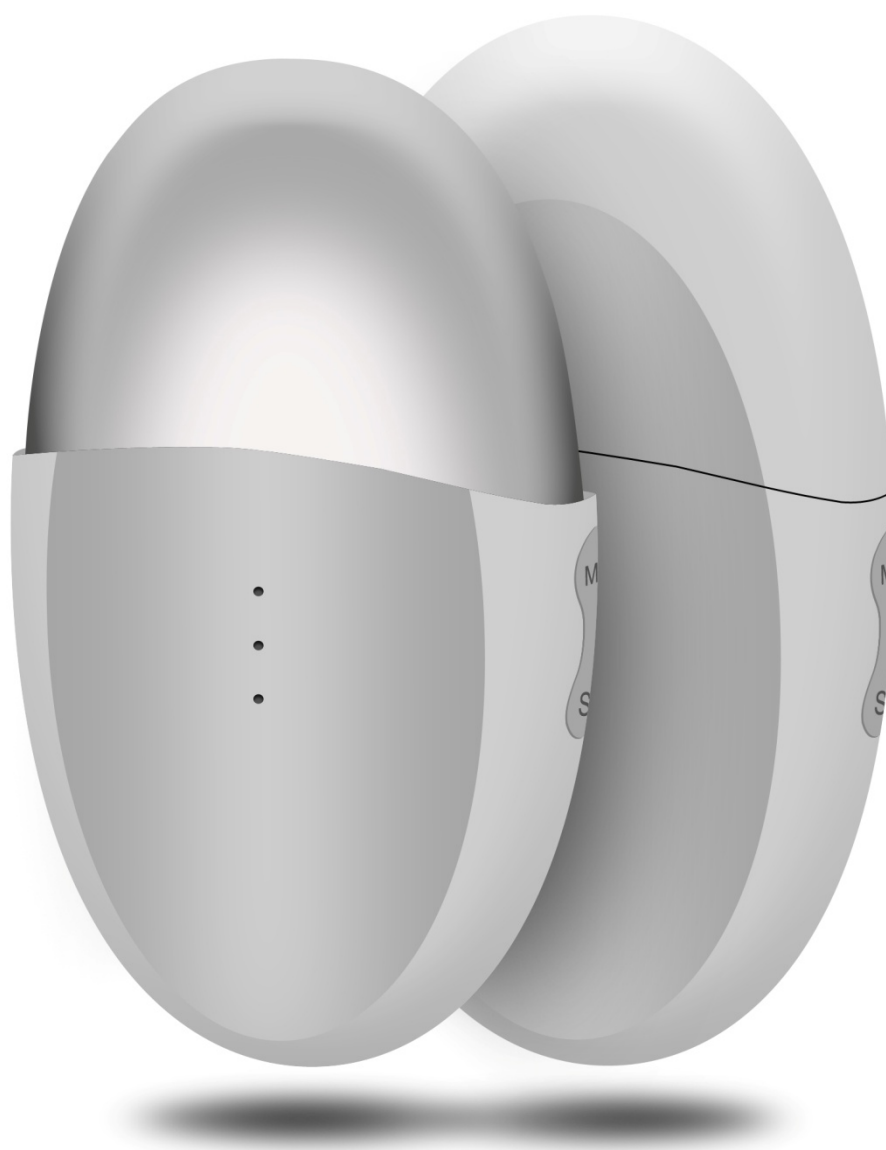

OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
INTENZIVNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI	7
PREVENCE VZNIKU AKNÉ A ČERNÝCH TEČEK	7
POUŽITÍ SONOGELU	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	9
GALVANICKÝ PROUD (IONIZACE)	10
DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST	11
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	12
NABÍJENÍ BATERIE	14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	14
CERTIFIKACE	14
DOVOZCE	14

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný ani vododěsný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2050 EYEPEN HEAT.
- Napájecí USB kabel.
- Návod k obsluze.

KONTRAIINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



HLAVNÍ VÝHODY

- Kombinuje galvanický proud, vibrace a vyhřívání
- Přímé zacílení na oblast kolem očí
- Potlačení tmavých kruhů
- Zmírňuje otoky a s tím související svalovou tenzi
- Podporuje zvýšení pružnosti pleti
- Eliminuje mimické a jemné vlasečnicové vrásky
- Napomáhá zapracovat kosmetické krémy
- Velmi snadné ošetření pleti díky oválnému tvaru aplikátoru
- Aplikační hlavice vyrobena z nerez oceli
- Použití vhodné pro všechny typy pleti

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vyhřívání: rozsah 42°C až 48°C
- Frekvence vibrací rozsah: 8400 až 12000 pulzů za minutu
- Počet módů použití: 5
- Výkon: 1,1W
- Napájení: nabíjecí baterie Li-ion 600mAh
- Nabíjení: pomocí USB kabelu (součástí balení)
- Rozměry: 12x8x4cm
- Hmotnost: 100g

AUTOMATICKÉ PROGRAMY


1. Galvanický proud
2. Vibrace
3. Působení tepla
4. Galvanický proud + působení tepla
5. Vibrace + působení tepla

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Eyepen Heat je moderní kosmetická pomůcka, která kombinuje technologie, které jsou přímo zacíleny na regeneraci oblasti kolem očí. Určeno pro zmírnění otoků, potlačení tmavých kruhů pod očima a zvýšení pružnosti pleti. Napomáhá výrazným způsobem zapracovat kosmetické krémy. 5 automatických programů kombinuje galvanický proud, vibrační mikromasáž a vyhřívání. Bezdrátové pohodlné používání díky zabudované nabíjecí baterii. Přístroj se vám snadno vejde do kabelky díky kompaktním rozměrům. Vysoce účinné technologie doplňuje kvalitní zpracování přístroje a luxusní design.


GALVANICKÝ PROUD

Záporná ionizace jako turbo pro vaše krémy. Aplikační hlavice generuje velké množství záporných iontů, které jsou navázány na kladné ionty v kožních buňkách. Vytvoří se tak optimální cesta, aby se živiny z krémů dostaly co nejhlouběji do pokožky. Při běžné aplikaci krému většinu absorbuje svrchní vrstva pokožky (epidermis). Zbytek bez jakéhokoliv dalšího využití vyschne bez užitku.

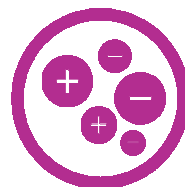


VIBRACE

Správná funkce lymfatického systému platí nejen pro tělesné končetiny, ale také pro náš obličej. Pokud máme lymfu a krevní oběh v pořádku, odvod nečistot z krve probíhá násobně lepším způsobem. Zlepšení krevního oběhu = stimulace lymfatického systému = lepší odvod nečistot a škodlivin z těla = krásná a zdravá pleť. Jednoduchá rovnice, která platí nejen pro obličej, ale pro celé naše tělo. Jemná vibrační masáž patří z technologického hlediska mezi nejjednodušší, ale zároveň velmi účinnou techniku ošetření pleti.

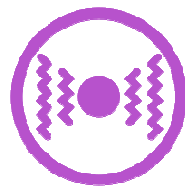


TEPELNÁ TERAPIE

Hlavním účinkem působení tepla na pleť je otevření kožních pórů. V kosmetickém studiu se po odlíčení pleti používá právě tento krok. Ať již následuje jakákoliv další procedura. Roztažení kožních pórů je elementární základ pro hloubkové vyčištění pleti. Dále jsou póry schopny absorbovat výživové látky z kosmetických přípravků hlouběji do pokožky. Kosmetičky používají nejčastěji napařený ručník. Vy jako skutečný profesionál kosmetický přístroj BeautyRelax.

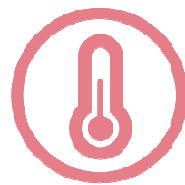

POPIS PŘÍSTROJE

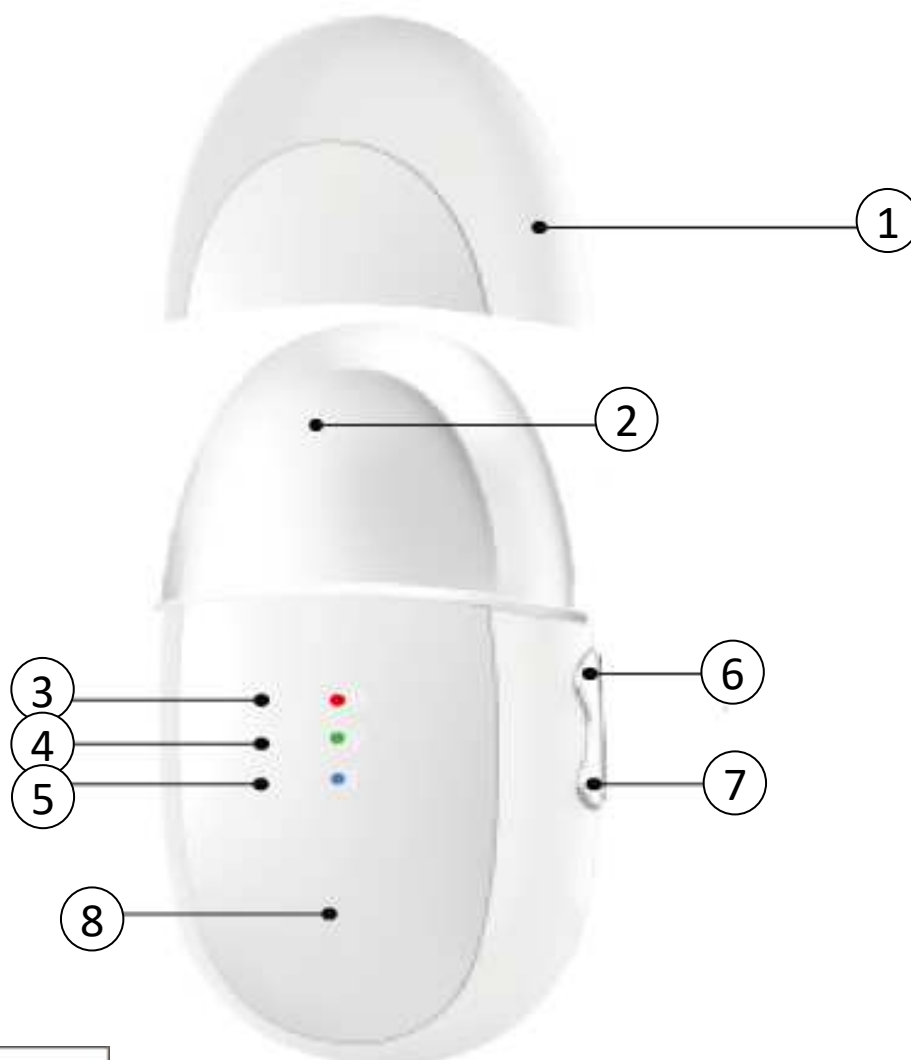

Přední strana aplikátoru
VIBRACE/GALVANICKÝ PROUD




Zadní strana aplikátoru
VYHŘÍVÁNÍ


1. Kryt aplikátoru
2. Aplikátor
3. Červená kontrolka
4. Zelená kontrolka
5. Modrá kontrolka
6. Tlačítko **ON/OFF**, **MODE**
7. Tlačítko nastavení **INTENZITY**
8. Tělo přístroje

VÝZNAM SVĚTELNÝCH INDIKÁTORŮ


Kosmetický přístroj BeautyRelax Eyepen Heat má 5 automatických programů. Každý program aktivuje specifické technologie. Automatické programy kombinují technologie přístroje doprovázené světelnou signalizací.

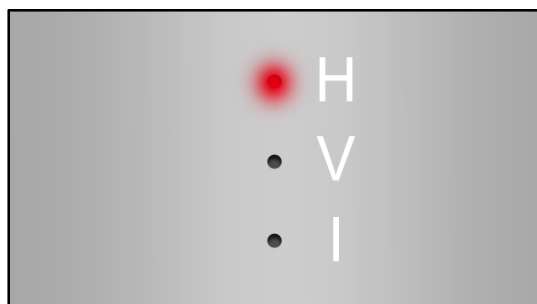


Červená indikace
VYHŘÍVÁNÍ

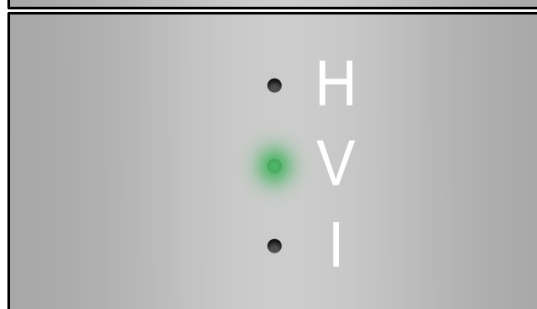


Zelená indikace
VIBRACE

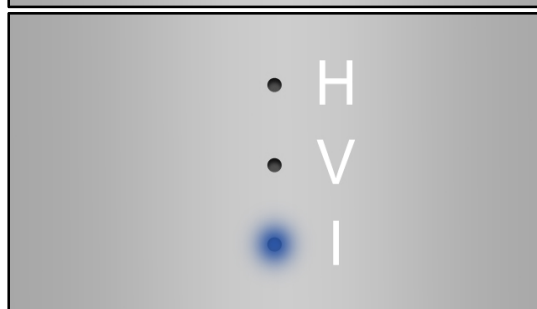

Modrá indikace
GALVANICKÝ PROUD

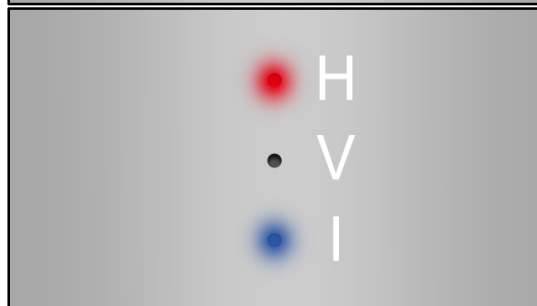

Červená & modrá indikace
VYHŘÍVÁNÍ + GALVANICKÝ PROUD

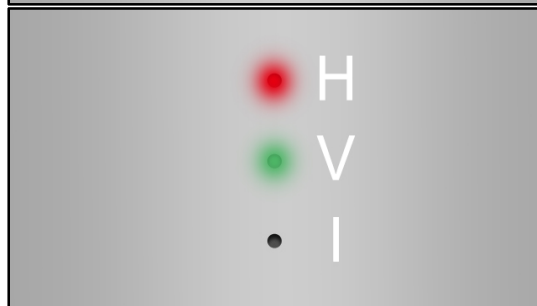

Červená & zelená indikace
VYHŘÍVÁNÍ + VIBRACE

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Přístroj zapnete stiskem tlačítka ON/OFF v délce 3 sekund. Stejným způsobem můžete přístroj kdykoliv vypnout. Podržte tlačítko ON/OFF v délce 3 sekund.
- 2.** Jakmile je přístroj zapnutý, pomocí krátkého stisku tlačítka ON/OFF můžete měnit jednotlivé automatické programy.
- 3.** Pomocí tlačítka INTENSITY si můžete snadno změnit intenzitu působení jednotlivých programů. Kontinuální světelná singalizace potvrzuje nízkou úroveň intenzity. Blikající světelná singalizace potvrzuje vysokou úroveň intenzity.
- 4.** Každý program má automatický časovač v délce 10 minut.
- 5.** Přístroj si pamatuje naposledy používaný program ošetření pleti. Po opětovném zapnutí přístroje vám nabídne tento stejný program.
- 6.** Přístroj můžete používat každý den v optimální délce ošetření 10 až 15 minut.
- 7.** Pro stimulaci pleti pomocí galvanického proudu doporučujeme použít libovolný pleťový kosmetický krém nebo sérum. Zpracování očního krému, očního séra nebo jiného typu krému je do pleti penetrováno pomocí galvanického proudu, vibrací a tepelné terapie.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Funkce galvanického proudu funguje pouze v případě, kdy při držení přístroje jsou vaše prsty v kontaktu na obou stranách přístroje současně. V opačném případě aplikační hlavice nebude galvanický proud generovat. Při kontaktu prstů s kovovým tělem přístroje se uzavře okruh mezi vámi a přístrojem. Tímto způsobem tak můžete ošetřit pouze sami sebe. Pokud se pokusíte ošetřit pleť druhé osoby, galvanický proud nebudou fungovat.
2. Při zahájení ošetření pleti je doporučeno začít nízkou úrovní výkonu. Každý uživatel má odlišnou citlivost pleti.
3. Pro správnou funkčnost režimu galvanického proudu je vhodné použít kosmetický krém nebo sérum.
4. Střídání galvanického proudu, vibrací a tepla je optimální pro zapracování kosmetických krémů či sér. Aplikátor je oboustranně použitelný. Můžete tak libovolně střídat jednotlivé strany.
5. V oblasti kolem očí je pokožka velmi tenká a citlivá. Postupujte vždy se zvýšenou obezřetností. Dbejte na to, aby kosmetický přípravek během používání nevnikl přímo do očí.
6. Jednotlivé automatické programy můžete během jednoho ošetření pleti vzájemně kombinovat. Není však nezbytně nutné použít za všech okolností všechny programy. Každý přednastavený program má různé účinky na pleť.
7. Pro dosažení maximálního efektu ošetření pleti je nezbytné, aby byla co největší plocha aplikátoru v kontaktu s pletí.
8. Kosmetický přístroj je vhodný pro ošetření celého obličeje. Vynikajících výsledků lze docílit zejména v oblasti očního okolí. Působení tepla, vibrací a galvanického proudu může výrazně potlačit tmavé kruhy pod očima. Významně podpoří krevní oběh.
9. Během použití přístroje vždy dbejte výběr správné strany aplikátoru. Přední strana aplikátoru (stejná strana, na které je panel se světelnou signalizací) poskytuje vibrace a galvanický proud. Druhá strana aplikátoru je určena pro stimulaci pleti vyhříváním.


DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST



Funkce galvanického proudu funguje pouze v případě, kdy při držení přístroje jsou vaše prsty v kontaktu s vodícími pásky na bočních stranách přístroje. V opačném případě aplikační hlavice nebude elektrické pulzy generovat. Při kontaktu prstů s vodícími pásky se uzavře okruh mezi vámi a přístrojem. Tímto způsobem tak můžete ošetřit pouze sami sebe. Pokud se pokusíte ošetřit pleť druhé osoby, galvanický proud nebude fungovat!

METODA OŠETŘENÍ OBLASTI KOLEM OČÍ


Hlavním smyslem ošetření oblasti kolem očí je podpořit lokální krevní oběh, podpořit kolagenní a elastická vlákna. Prohřát teplem. Kosmetický přístroj BeautyRelax Eyepen Heat disponuje technologiemi, které sou pro oblast kolem očí optimální a potlačit projevy výskytu tzn. pytlů kolem očí.

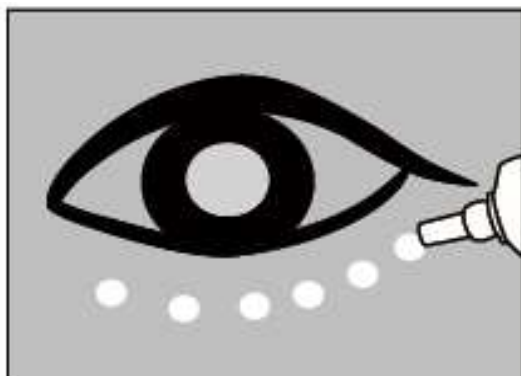

Na oblast kolem očí naneste kosmetický krém nebo sérum. Postačí tenká vrstvička, která pokryje vybranou plochu rovnoměrně.



Pomocí aplikátoru přístroje se pohybujte táhlými pohyby ve směru šípek.

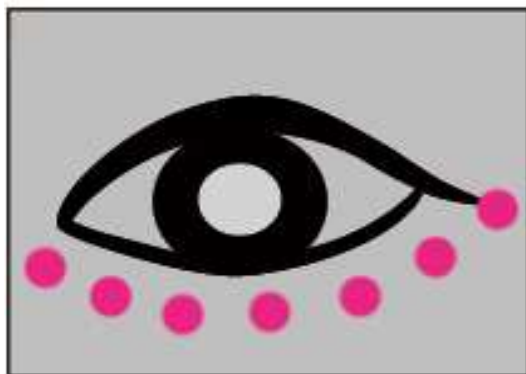

V dalším kroku je vhodné ošetřit pleť aplikátorem metodou „razítkování“. Aplikátor přiložte na pleť v délce 2-4 sekund. Takto postupujte krok po kroku podle rozmístění růžových teček na obrázku. Takto opakujte optimálně 6x pro každé oko.



METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU

Možnosti ošetření pleti v oblasti obličeje a krku.



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

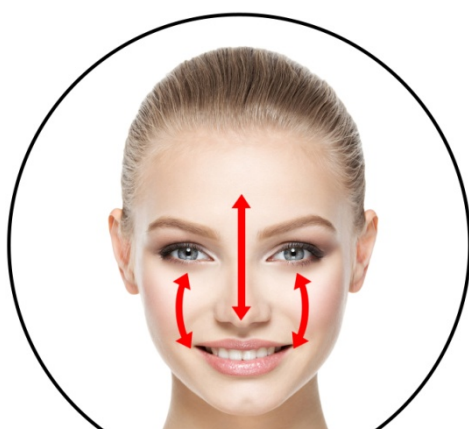


T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Kontinuální působení všech funkcí přístroje umožňuje dostatečně nabitá baterie. Různé stavy baterie jsou vyjádřeny pomocí světelné signalizace.

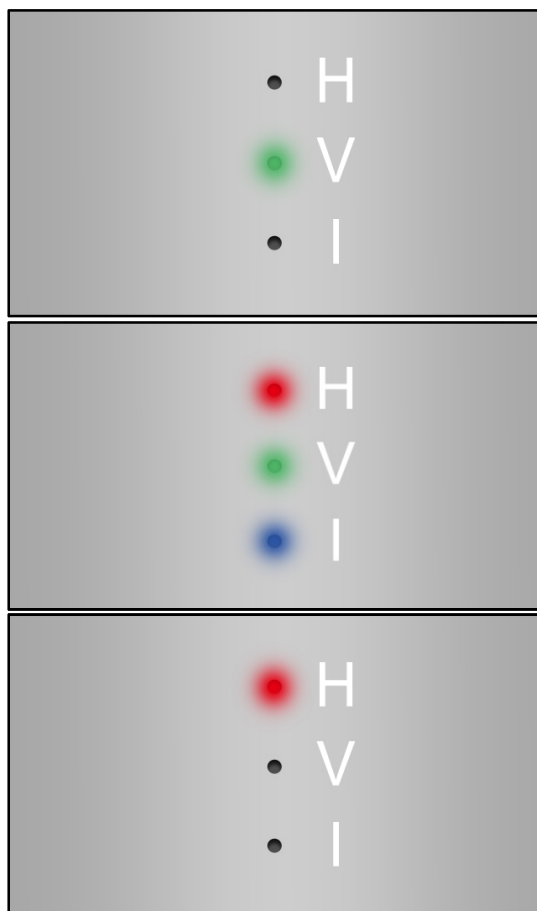

Zelená indikace

**PROCES NABÍJENÍ JE ÚSPĚŠNĚ
DOKONČEN**

Červená, zelená, modrá indikace

**BATERIE MÁ NÍZKÝ STAV ENERGIE.
BATERII JE NUTNÉ NABÍT.**

Červená indikace

PRŮBĚH NABÍJENÍ

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Nabíjení může trvat až 1 až 3 hodiny v závislosti na kondici baterie.
4. Průběh nabíjení signalizuje červené světlo. Jakmile je proces nabíjení dokončen, rozsvítí se zelené světlo.

Upozornění: Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.