

# NÁVOD K OBSLUZE

Soft laser model BR-1180

# LASERFORCE





# ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtete všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti či nesrovnalosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: [rma@santadria.cz](mailto:rma@santadria.cz)

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si přečtete tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- První použití můžete konzultovat se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání přístroje.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.
- Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
- Přístroj nesdílejte s druhými osobami.

# PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE


BeautyRelax laserforce je kosmetický přístroj, který využívá jednu z nejpoužívanějších technologií v dermatologii tzv. Soft Laser o specifické vlnové délce 670nm. Obrovskou výhodou používáním Soft Laseru je nastartování přirozených hojivých procesů na úrovni buněk.

## Obecná definice laseru a jeho účinky v dermatologii

Laser je optický zdroj elektromagnetického záření o určitém výkonu a vlnové délce. Světlo je vyzařováno ve formě úzkého svazku. V dermatologii se používají lasery s obecným názvem LLLT (Low Level Laser therapy = terapie nízko-úrovňovým laserem). Laser v oblasti neinvazivního ošetření funguje na principu biostimulace. Laserové světlo stimuluje mitochondrie v buňkách k výrobě ATP (adenosintrifosfátu). Prostřednictvím ATP dochází ke značnému uvolnění množství energie. Hlavním výsledkem působení laseru na pokožku je:

1. větší produkce kolagenu
2. zlepšení látkové výměny přes buněčnou stěnu

Tyto dva procesy jsou nezbytné pro nastartování procesu regenerace a celkově ke zdravější kůži. Pro tento typ laseru se obecně ukotvil termín Soft Laser. Vlnová délka Soft Laseru se pohybuje v rozmezí od 635 do 670 nanometrů (nm). Soft laser patří do kategorie neinvazivní terapie – nezpůsobuje žádnou bolest, poranění či zarudnutí.

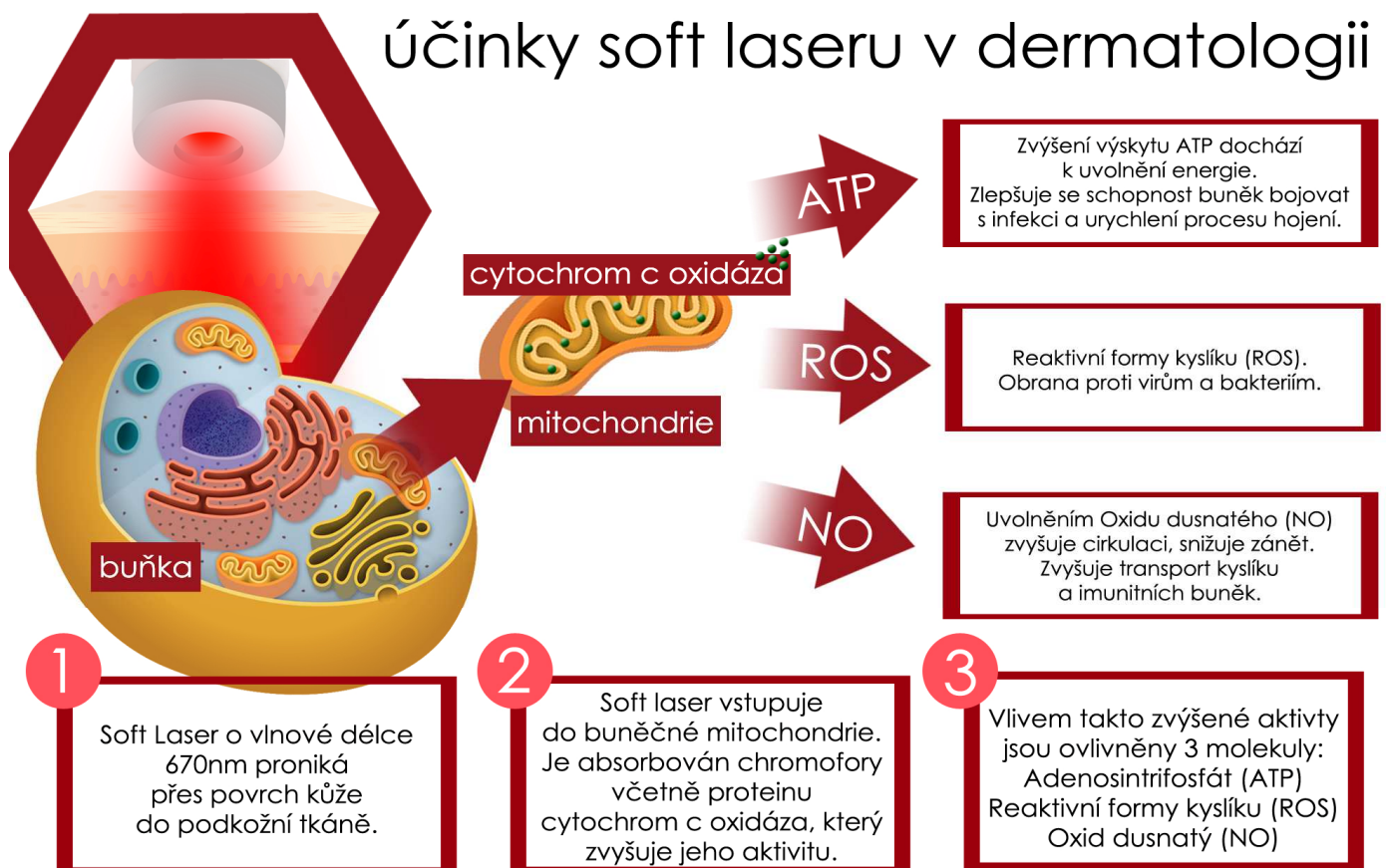

možnosti  
ošetření pleti



### **Opary**

Běžné onemocnění způsobené virem Herpes Simplex. Projevuje se výskytem puchýřků naplněných tekutinou v oblastech kolem rtů, nosu či brady. Kožní buňky, které jsou postiženy herpetickým virem, mají mnoho vlastních mechanismů pro léčbu. Soft Laser významným způsobem k tomuto procesu přispívá, protože buňky vyžadují zvýšenou buněčnou energii (stimulaci mitochondrií v buňkách).

### **Aknózní pleť**

Výskyt a intenzita akné se může individuálně velmi lišit. Pokud je stav aknózní pleti skutečně těžký a závažný, je nezbytné se poradit s dermatologem. Nic však nebrání tomu požívat na tento stav pleti Soft Laser. Pokud je používán důsledně, má velice příznivé účinky na vyskytující se záněty. Ideální vzdálenost pleti od zdroje laseru je 1 centimetr.

### **Vrásky**

Soft Laser neumí mechanicky odstranit hluboké vrásky. Stimulací pleti přístrojem Laserforce však výrazně podporuje tvorbu nových buněk. Podporou krevního oběhu zlepšuje vitalitu buněk a jejich látkovou výměnu.

### **Záněty, drobné jizvičky**

Jednou ze zásadních funkcí Soft Laseru je protizánětlivý a hojivý efekt zejména po úrazech. Soft Laser významným způsobem přispívá k regeneraci podkoží.

## POPIS PŘÍSTROJE



## OBSAH BALENÍ

- přístroj LASERFORCE
- návod k obsluze

# OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE & POSTUP OŠETŘENÍ

1. Důkladně omyjte a osušte místo, na které budete přístrojem působit.
2. Vždy dbejte na to, aby světelný paprsek nemířil přímo do očí. Rovněž se vyhněte přímému pohledu na světelný paprsek.

## **NIKDY NEMIŘTE SVĚTELNÝM PAPSREM PŘÍMO DO OČÍ!**

3. Odstraňte zadní kryt baterie.
4. Vložte 2ks baterie typu AAA (nekombinujte staré baterie s novými; pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte).
5. Vraťte zpět kryt baterií na původní místo.
6. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF.
7. Aplikační hlavici držte od místa ošetření v minimální vzdálenosti 1cm.

## **NIKDY NEDRŽTE APLIKAČNÍ HLAVICI V PŘÍMÉM KONTAKTU S POKOŽKOU!**

8. Doporučený čas ošetření se pohybuje kolem 15 až 30 minut nejlépe každý den.
9. Přístroj vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF.

Pomocí soft laseru se nashutují přirozené hojivé procesy. Pozitivní výsledky lze očekávat při dodržení délky ošetření v průběhu 4 až 5 dní. Vždy závisí na rozsahu ložiska problému a stádiu, ve kterém se nachází. Používání přístroje je bezbolestné, neinvazivní, bez jakýchkoliv vedlejších či nepříjemných pocitů. Pokud to bude situace vyžadovat a nedojde k zřetelnému zlepšení, konzultujte další kroky se svým praktickým lékařem.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- typ laseru: LLLT (Low Level Laser therapy) třída 3A
- vlnová délka: rozsah od 635 do 670nm
- provozní režim laseru: stálé světlo
- výkon: 6mW
- napájení: 2x baterie typu AAA
- rozměry: 13x2x2cm
- hmotnost: 90g

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při čištění přístroje nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch přístroje. Tělo přístroje v případě potřeby očistěte lehce navlhčenou utěrkou. Vždy dbejte na to, aby se vlhkost nedostala dovnitř přístroje. Aplikační hlavice se nesmí dostat do kontaktu s pokožkou. Proto není třeba speciální údržby.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [rma@santadria.cz](mailto:rma@santadria.cz)

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

Soft laser | LASERFORCE BR-1180 - návod k obsluze | strana 8