

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj s fotonovou terapií
Beautyrelax BR-2924W

LIGHTPANEL

PROFESSIONAL EXCLUSIVE



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OCHRANA ZRAKU	5
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	6
OBSAH BALENÍ	7
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	8
HLAVNÍ BENEFITY	8
TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM	8
KRÁSNÁ A ZDRAVÁ PLEŤ SE BEZ DOSTATEČNÉ HYDRATACE NEOBEJDE	10
PRINCIP FUNGOVÁNÍ INTEGROVANÉHO ATOMIZÉRU	10
PŮSOBENÍ TEPLA	11
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	12
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ PANELU	13
POPIS PRODUKTU	15
INSTALACE PRODUKTU	17
VÝSLEDNÁ SESTAVA PRODUKTU	19
POUŽITÍ DLE TYPU PLETI	20
NAPLNĚNÍ A INSTALACE ZÁSOBNÍKU	21
POUŽITÍ FUNKCE EMS	22
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	23
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY & ODPOVĚDI	24
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	26
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	26
CERTIFIKACE	26
DOVOZCE	26
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	27

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



OCHRANA ZRAKU

Přístroj používá velmi výkonné LED diody, které generují intenzivní fotonové světlo. Výkon je nastaven tak, aby přinesl blahodárné účinky na pleť ve specifické vlnové délce. Při použití přístroje se vždy vyvarujte přímého pohledu zraku do zdroje světla. Před použitím přístroje si vždy nasadte ochranné brýle, které jsou součástí balení. Při přímém a dlouhodobém pohledu do světelného zdroje může dojít k podráždění očí nebo poškození zraku.



DŮLEŽITÁ VÝSTRAHA
DBEJTE MAXIMÁLNÍ POZORNOST

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT



Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

Neurologické a světelné reakce

- **Epilepsie** nebo jiná onemocnění spojená s citlivostí na světelné podněty
- **Fotosenzitivita** (přecitlivělost na světlo)

Kožní a dermatologické stavy

- **Akutní zánětlivá kožní onemocnění**
- **Otevřené rány, popáleniny, mokvající ložiska**
- **Infekční kožní onemocnění** (bakteriální, virová, plísňová)
- **Kožní nádory nebo podezřelé pigmentové léze** v ošetřované oblasti

Užívání fotosenzitivních látek

- Užívání léků nebo látek, které mohou zvyšovat citlivost pokožky na světlo, zejména:
 - některá **antibiotika**
 - **retinoidy**
 - **hormonální léčba**
 - **tězalka tečkovaná**

V těchto případech doporučujeme **konzultaci s lékařem nebo lékárníkem**.

Srdeční a elektronické implantáty (zejména při EMS)

- **Kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát**
→ **funkci EMS nepoužívat**
- **Závažná srdeční onemocnění**
→ doporučena konzultace s lékařem

Těhotenství

- Použití LED světla se v kosmetické praxi obvykle považuje za šetrné,
přesto se během těhotenství doporučuje individuální posouzení a konzultace s lékařem, zejména při použití EMS.

Další omezení

- **Vysoká horečka nebo akutní infekční onemocnění**
- **Výrazně podrážděná, přehřátá nebo spálená pokožka**
- **Děti** – přístroj není určen pro použití osobami mladšími 18 let

Přístroj se nedoporučuje používat osobám s epilepsií, fotosenzitivitou, při akutních kožních onemocněních, otevřených ranách nebo infekcích pokožky. Opatrnost a případná konzultace s lékařem je vhodná u osob se srdečním onemocněním, kardiostimulátorem, během těhotenství nebo při užívání léků zvyšujících citlivost na světlo. Funkci EMS nesmí používat osoby s elektronickými implantáty.

OBSAH BALENÍ

- 1x Kosmetický přístroj s fotonovou terapií LIGHTPANEL PROFESSIONAL EXCLUSIVE
- 1x Nabíjecí adaptér
- 1x Ochranné brýle
- 1x Zásobník na tekutinu s podstavcem
- 1x Sada kabelů pro EMS funkci na obličeji
- 1x Sada kabelů pro EMS funkci na těle (včetně elektrod)
- 1x Návod k obsluze

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Výkon: 80W
- Počet světelných diod: 184
- Rozměry: 55x35x27cm
- Hmotnost: 3kg

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE


Terapie fotonovým světlem je v oblasti kosmetické aplikace velmi populární. Aplikace fotonovým světlem nebolí a má velmi dobré výsledky. Kosmetický přístroj s fotonovou terapií BeautyRelax poskytuje fotonovou terapii s pokrytím celého obličeje a krku. Přístroj slibuje vysoce komfortní použití ve srovnání s ručními přístroji. Přístroj nemusíte držet v ruce a zároveň světlo pokrývá rovnoměrně celou plochu obličeje, krku a dekoltu. Stálost působení fotonovým světlem je pro úspěšné dosažení výsledků klíčové. 8 barev fotonové terapie. Přístroj má integrovaný atomizér pro hydrataci pleti. Funkce EMS pro posílení svalů.

HLAVNÍ BENEFITY

- Rovnoměrné pokrytí obličeje světelnými pásky
- Vysoká efektivita použití díky 184 intenzivních LED světel
- V průběhu použití si můžete vaši pleť nahřát a hydratovat

TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Existují odborné studie a dlouhodobá praxe v kosmetické péči, které naznačují, že různé vlnové délky světla mohou mít odlišné kosmetické účinky na vzhled pokožky.

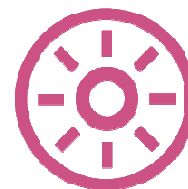

REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Světelná energie působí na povrchové vrstvy pokožky a může ovlivňovat přirozené procesy buněk, které se podílejí na celkovém vzhledu pleti.
- Světelná terapie může podporovat přirozené regenerační procesy pokožky.
- Při správném používání je metoda obvykle dobře snášena. U citlivé pokožky se může výjimečně objevit přechodné začervenání nebo pocit tepla.
- Může přispívat ke zklidnění pokožky vystavené stresovým vlivům.

BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE

Zánětlivé projevy pokožky mohou vznikat v důsledku různých vnějších i vnitřních vlivů, jako je stres, mechanické podráždění nebo celkový stav organismu. Světelná terapie je v kosmetické péči využívána jako doplňková metoda, která může podporovat přirozené regenerační procesy pokožky a přispívat k jejímu svěžímu a sjednocenému vzhledu. Působení světla probíhá neinvazivním a bezbolestným způsobem a ovlivňuje povrchové struktury pokožky, které se podílejí na jejích přirozených funkcích. Při správném používání je tato metoda obvykle dobře snášena. Díky svému šetrnému charakteru si našla široké uplatnění zejména v oblasti kosmetické péče o pleť.

1. Červené světlo (640nm)

Zlepšení kvality pleti a zmenšení pórů.

2. Modré světlo (415nm)

Bakterie v akné obsahují porfyriny. Díky vysoké afinitě s vlnovou délkou je modré světlo schopno porfyriny ničit. Kromě toho má modré světlo zklidňující účinek, který je velmi účinný při přecitlivělosti pleti. U problematické pleti lze modré světlo používat častěji, vždy však s ohledem na individuální reakci pokožky. Doporučujeme začínat kratší dobou a nižší intenzitou.

3. Fialové světlo (690nm)

Kombinuje červené a modré světlo, které má dvě účinné fototerapie. Zejména má dobrý účinek na potlačení příznaků akné.

4. Žluté světlo (590nm)

Má speciální vlnovou délku 590nm. Podporuje absorbování kosmetických přípravků. Přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu. Zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti. Obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu. Napomáhá zpomalovat stárnutí kůže.

5. Zelené světlo (530nm)

Zelené světlo napomáhá vyrovnat barevný pigment. Urychluje proces hojení ran.

6. Azurové světlo (490nm)

Zvyšuje buněčnou energii a má příznivé účinky pro celkový metabolismus kožní tkáně.

7. Bílé světlo

Je využíváno v kosmetické péči pro podporu hygienického komfortu pokožky.

8. Oranžové světlo (590 až 620)

Kombinace žlutého a červeného světla.

KRÁSNÁ A ZDRAVÁ PLEŤ SE BEZ DOSTATEČNÉ HYDRATACE NEOBEJDE

Množství tekutin má význam nejen pro celé tělo, ale zejména pro pleť, na kterou se často zapomíná. Krásná a zdravě vyhlížející pleť obsahuje velké množství vody. Bez vody se jednoduše náš organismus neobejde. Zejména v letních měsících dochází k rychlejšímu vysušení pleti. Nedostatkem vláh je pleť suchá a působí opotřebeným dojmem. Pleť rychle ztrácí pružnost a je více náchylná ke vzniku vrásek. Celkově rychleji stárne. Snížený množství vody v těle způsobuje dehydrataci ve všech vrstvách pokožky. Přestože konzumujeme větší množství vody, nemusí to pro naši pleť znamenat dostatečnou hydrataci. Proto je důležité věnovat hydrataci pleti zvýšenou pozornost. Kosmetické krémy a séra však často vyschnou na povrchu pokožky bez dalšího užitku. Pravidelná a hlubková hydratace pleti může zpomalit projevy stárnutí a zajistit zdravý vzhled!

PRINCIP FUNGOVÁNÍ INTEGROVANÉHO ATOMIZÉRU

Kosmetický přístroj BeautyRelax je vybaven integrovaným atomizérem určeným pro rovnoměrnou aplikaci hydratační mlhy. Tekutina je ze zásobníku vedena do atomizéru, kde je pomocí vysokofrekvenčních vibrací rozptýlena na velmi jemné mikročástice. Tyto částice vytvářejí jemnou mlhu, která rovnoměrně zvlhčuje povrch pokožky a přispívá k jejímu komfortu. Použití atomizované mlhy podporuje pocit hydratace pleti a může napomáhat udržení její svěžesti během kosmetického ošetření. V kombinaci s působením světelné terapie poskytuje příjemný hydratační doplněk kosmetické péče.




PŮSOBENÍ TEPLA

Působení tepla zvyšuje komfort pleti a podporuje její prokrvení, což je běžně využíváno v kosmetické péči. V kosmetickém studiu se po odlíčení pleti používá právě tento krok. Ať již následuje jakákoliv další procedura. Roztažení kožních pórů je elementární základ pro hloubkové vyčištění pleti. Dále jsou póry schopny absorbovat účinné látky krémů na akné hlouběji do pokožky. Pro zahřátí pleti se používá napařený ručník. To je však velké retro. Vy jako skutečný profesionál využijete efektivní tepelnou terapii s možností nastavení teplotního rozsahu!



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko **AUTO**
3. Tlačítko **ČERVENÉ** světlo
4. Tlačítko **MODRÉ** světlo
5. Tlačítko **ŽLUTÉ** světlo
6. Tlačítko **ZELENÉ** světlo
7. Tlačítko **FIALOVÉ** světlo
8. Tlačítko **ORANŽOVÉ** světlo
9. Tlačítko funkce **TEPLA**
10. Tlačítko funkce **CHLADU (NANO MLHA)**
11. Tlačítko funkce **EMS**
12. Tlačítko **INTENZITY** světla
13. Tlačítko **ZMĚNA** hodnoty
14. Tlačítko **ZMĚNA** hodnoty
15. Tlačítko **UV** světlo
16. Displej

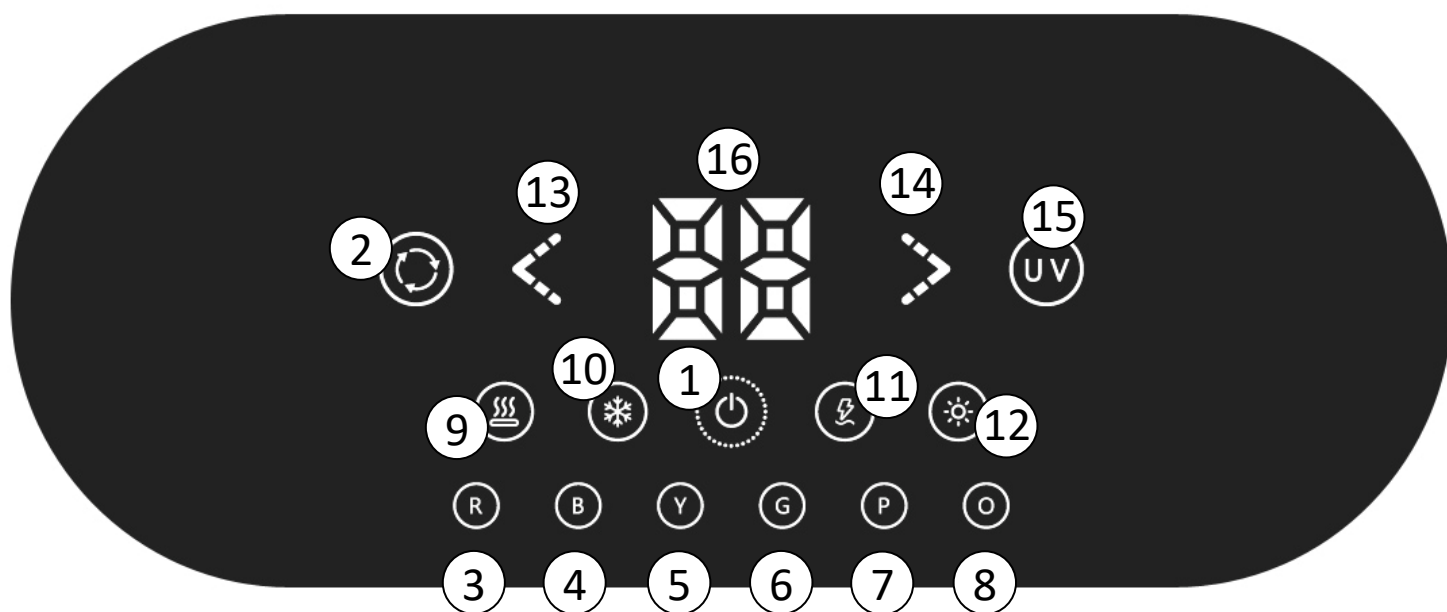

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ PANELU

1. Tlačítko **ON/OFF**

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí přístroje.

2. Tlačítko **AUTO**

Tlačítko pro zapnutí automatického programu. V tomto programu se barvy světla mění automaticky. V režimu AUTO se střídají barvy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová.

3. Tlačítko **ČERVENÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí červeného světla.

4. Tlačítko **MODRÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí modrého světla.

5. Tlačítko **ŽLUTÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí žlutého světla.

6. Tlačítko **ZELENÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí zeleného světla.

7. Tlačítko **FIALOVÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí fialového světla.

8. Tlačítko **ORANŽOVÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí oranžového světla.

9. Tlačítko funkce **TEPLA**

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí funkce tepla. Teplotu si můžete nastavit v rozsahu 5 úrovní intenzity. Úroveň působení tepla si můžete nastavit opakovaným stiskem tlačítka. **Vždy doporučujeme mít aktivní funkci TEPLA nebo CHLADU. Ne současně.**

10. Tlačítko funkce **CHLADU (NANO MLHA)**

Působení atomizované mlhy. Před aktivací funkce je nezbytné naplnit průhledný zásobník. K dispozici je celkem 5 úrovní intenzity působení nano mlhy. Intenzitu si můžete měnit opakovaným stiskem tlačítka. Úroveň intenzity je zobrazeno na displeji. **Vždy doporučujeme mít aktivní funkci TEPLA nebo CHLADU. Ne současně.**

11. Tlačítko funkce **EMS**

Působení funkce EMS pro oblast obličeje. Pro využití této funkce je třeba mít připojený kabel. Ke kabelům obličejovou masku (není součástí základního balení). Opakovaným stiskem tlačítka si můžete upravit intenzitu působení. Aktuálně nastavená intenzita je vždy zobrazena na displeji.

12. Tlačítko INTENZITY světla

Tlačítko pro nastavení intenzity působení světla. K dispozici je celkem 5 úrovní. Aktuálně nastavená intenzita je vždy zobrazena na displeji.

13. Tlačítko ZMĚNA hodnoty

Tlačítko pro změnu času.

14. Tlačítko ZMĚNA hodnoty

Tlačítko pro změnu času.

15. Tlačítko UV

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí bílého světla.

16. Displej

Zobrazení zbývajících času nebo nastavené intenzity dané funkce.


POPIS PRODUKTU

- 1.** Ovládací panel
- 2.** Tělo produktu
- 3.** Světla fotonové terapie
- 4.** Výstup působení atomizované mlhy




POPIS PRODUKTU

- 5.** LED světla fotonové terapie
- 6.** Výstup pro působení tepla
- 7.** Výstup pro atomizovanou mlhu
- 8.** Zdířka pro zapojení kabelu s funkcí EMS
- 9.** Zdířka pro zapojení napájecího kabelu

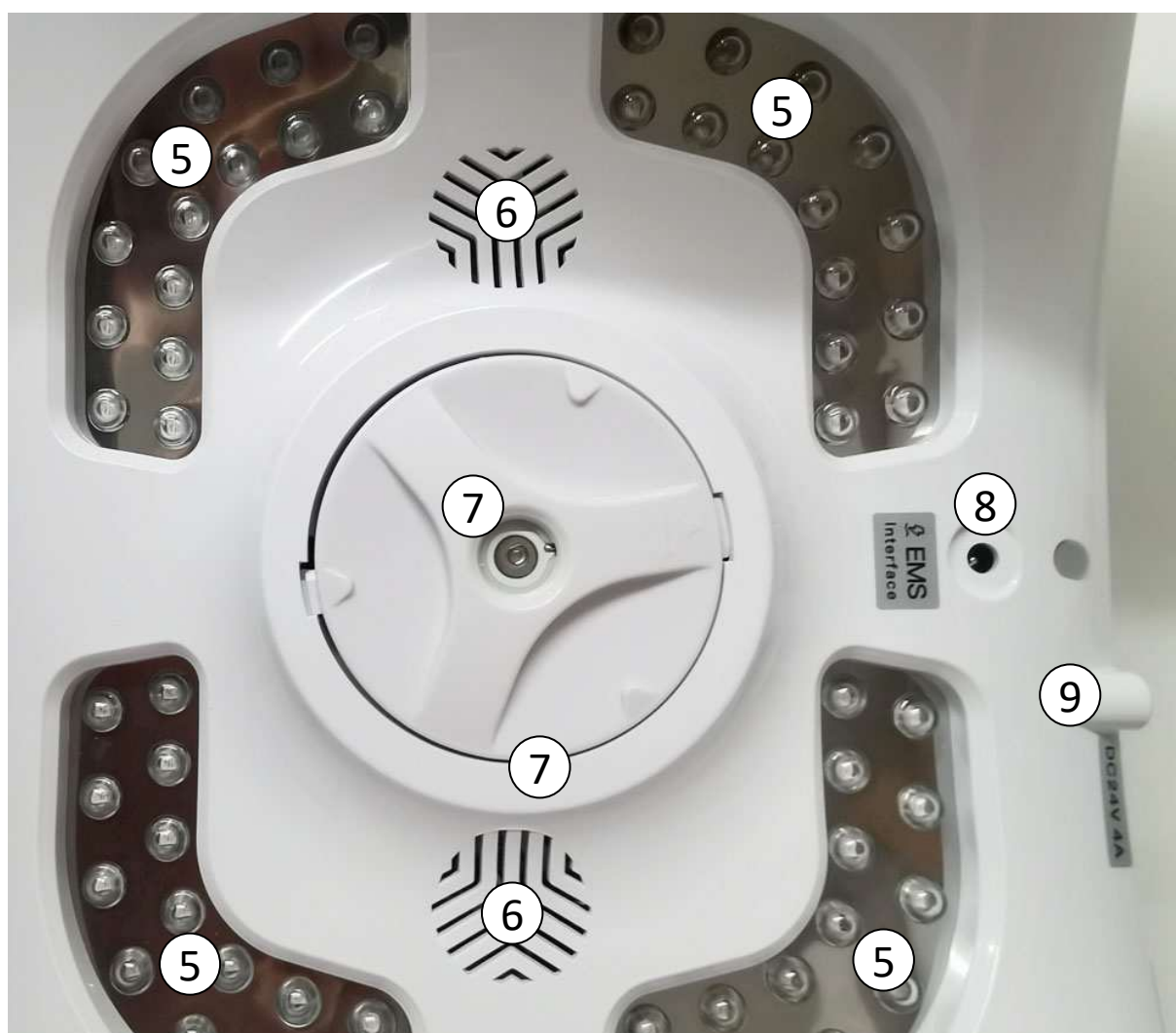

INSTALACE PRODUKTU

- Jednotlivé části přístroje propojte.
- K instalaci není třeba nic rozdělovat nebo šroubovat.
- Oba boky není možné připojit k hlavnímu středovému panelu nesprávně. Není přesně stanoveno, kterou boční stranu připojit jako první. Boční strany je možné vzájemně vyměnit.
- Vždy dbejte na to, aby byla boční část přístroje připojena nadoraz.

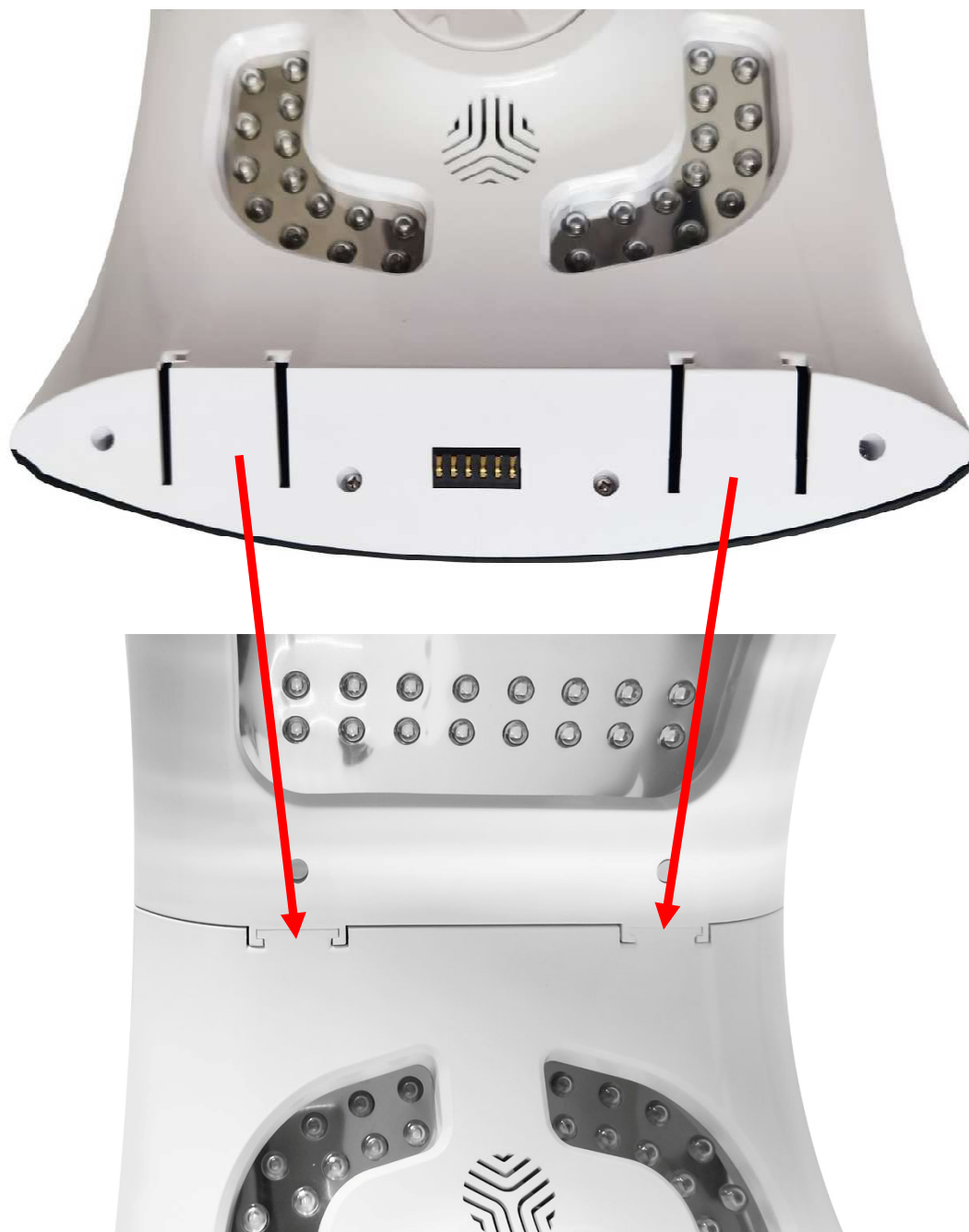

1



2



VÝSLEDNÁ SESTAVA PRODUKTU



POUŽITÍ DLE TYPU PLETI

Obecně je vhodný pro většinu typů pleti. U citlivé nebo reaktivní pokožky doporučíme krátkou expozici a nižší intenzitu.



normální



suchá



smíšená



mastná



citlivá




aknézní

NAPLNĚNÍ A INSTALACE ZÁSObNÍKU


1. Pro naplnění zásobníku používejte výhradně tekutinu s nízkým bodem hustoty. V opačném případě nebude funkce atomizované mlhy fungovat správně. Pokud přidáním další látky do tekutiny výrazně zvýšíte hustotu nebo se v tekutině budou vyskytovat velké mechanické částice, přístroj nebude pracovat správně a může dojít k jeho poškození.



2. Zásobník instalujte do přístroje. Postupujte podle šipek. Otočením ve směru červených šipek - utažení zásobníku do přístroje. Otočením ve směru zelených šipek - uvolnění zásobníku. Dva kontaktní piny na bílém podstavci musí směřovat na kontaktní plochu umístěnou na přístroji.

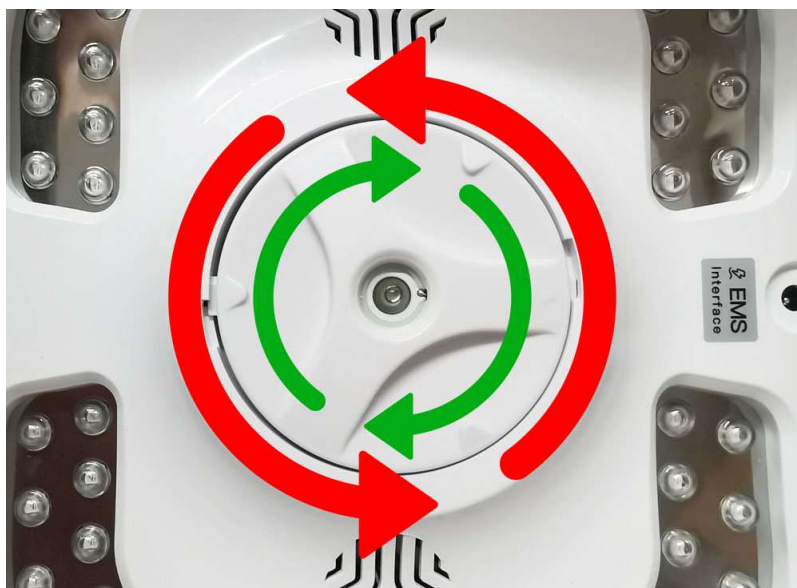


UTAŽENÍ - UVOLNĚNÍ

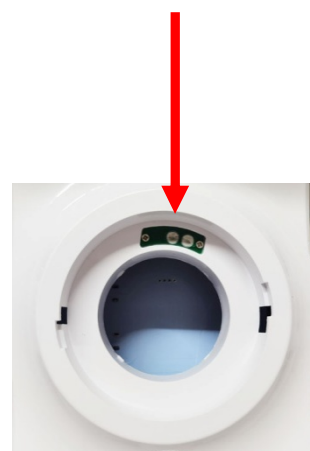

POUŽITÍ FUNKCE EMS

Součástí balení jsou dvě sady kabelů, které umožňují využít funkci EMS pulzů. Máte tedy dvě možnosti použití: EMS pulzy na obličej nebo EMS pulzy na část těla v blízkosti panelu (např. krk, ramena, horní část zad). V případě použití EMS na obličej stačí použít běžnou obličejovou masku, kterou koupíte v obchodě (není součástí základního balení přístroje). Masku zapojíte ke kabelům pomocí „krokodýlích zubů“. V případě použití EMS na vybranou část těla doporučujeme nanést na kontaktní elektrody vrstvu sonogelu. Zvýší se tak vodivost pleti a EMS pulzy se tak mohou na pokožku lépe navázat.

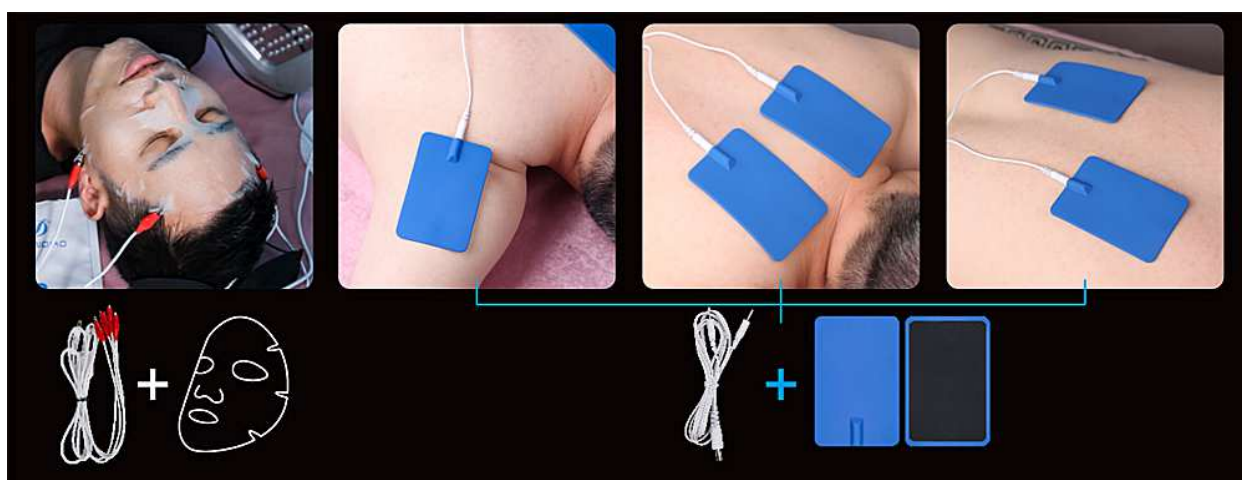

beautyrelax



   **PO - PÁ 11:00 - 18:00**
(420) 737 196 160

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před požitím doporučujeme pleť odlíčit od makeupu. Pleť důkladně omyjte a osušte. V případě potřeby můžete nanést váš oblíbený kosmetický krém nebo sérum. Přístroj používejte ideálně v blízkosti elektrické zásuvky. Pokud to situace vyžaduje, použijte klasický prodlužovací kabel (není součástí balení). Kabel napájecího adaptéru by neměl být příliš napnutý. Předejdete tak vytržení konektoru napájecího adaptéru.
- Přístroj nepoužívejte v dosahu zdroje tepla (např. topení). Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí (např. v koupelně).
- Přístroj umístěte na rovnou plochu. Pro větší komfort používání přístroje si dejte pod hlavu polštářek.
- Výměnu/naplnění zásobníku provádějte vždy, když je přístroj vypnutý a odpojený od napájecího kabelu. Do zásobníku s vodou nalijte vodu (kojeneckou nebo destilovanou). Z dlouhodobého hlediska tím přispějete k dlouhé životnosti přístroje. Kohoutková voda může obsahovat částice vodního kamene, což není po technické stránce pro přístroj přípustné. Do zásobníku nepřidávejte žádné další látky, barviva či aroma, která by změnila hustotu vody. Mohlo by dojít k vážnému a trvalému poškození přístroje. Zásobník do podstavce pečlivě dotáhněte.
- Pro spuštění přístroje stiskněte **ON/OFF**.
- Můžete si snadno přepínat mezi jednotlivými barvami fotonového světla. Použijte k tomu tlačítka 3,4,5,6,7,8. Pro automatické přepínání mezi jednotlivými barvami použijte tlačítko **AUTO**.
- Pomocí tlačítka **INTENZITA** si můžete nastavit intenzitu působení světla. K dispozici je rozsah od 1 do 5. Aktuálně nastavená hodnota intenzity je zobrazena na displeji.
- Pomocí tlačítka **CHLAD** si můžete aktivovat působení atomizované mlhy. Opakovaným stiskem můžete upravit intenzitu působení atomizované mlhy.
- Pomocí tlačítka **TEPLO** si můžete aktivovat působení tepla. Opakovaným stiskem můžete upravit intenzitu působení tepla.
- Pro funkci EMS pulzů připojte příslušný typ kabelu. Funkci působení EMS pulzů aktivujete stisknutím tlačítka EMS. Opakovaným stiskem můžete upravit intenzitu působení elektrických pulzů.
- Pro aktivaci působení atomizované mlhy použijte příslušné tlačítko. Pokud je třeba vodu do zásobníku doplnit, přístroj vždy vypněte a odpojte od napájecího adaptéru. Po skončení vždy přebytečnou vodu ze zásobníku vylijte.
- Samotnou péči atomizované mlhy si můžete dopřávat každý den. V případě fotonového světla doporučujeme délku v rozsahu od 15 do 30 minut alespoň 3x týdně. Pokud řešíte určitý specifický problém - např. akné, doporučujeme působení modrého světla každý den v délce 20 minut. Nejprve začínejte s nízkou intenzitou světla. Poté postupně přidávejte na intenzitě.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY & ODPOVĚDI

Jak funguje LED světelná terapie?

LED diody vyzařují specifické vlnové délky světla, které působí na pokožku a podporují její přirozené procesy. Nezahřívá hluboké tkáně a nenarušuje strukturu kůže.

Je LED terapie bolestivá?

Ne, terapie je zcela neinvazivní a bezbolestná. Klientky mohou případně vnímat jen lehké teplo či relaxační světelný efekt.

Jak dlouho trvá jedno ošetření?

Obvykle 15 až 30 minut podle typu světla a konkrétního kosmetického postupu.

Jak často mohou klientky podstoupit ošetření?

Doporučuje se 2 až 3 týdně, nebo podle nastaveného kosmetického plánu.

Je LED terapie vhodná pro citlivou pleť?

Ano, zejména modré a zelené světlo je obvykle vhodné i pro citlivou pleť. Je však potřeba vždy zhodnotit individuální reakce pokožky.

Mohou se kombinovat různé barvy světla v jednom ošetření?

Ano, kombinace je běžná. Fialové světlo je přímo smíšením modré a červené, ostatní lze aplikovat postupně.

Jaký je rozdíl mezi červeným a modrým světlem?

Červené světlo podporuje vzhled pleti a její celkovou kvalitu. Modré světlo se používá u pleti se sklonem k akné.

Pro koho je červené světlo nejvhodnější?

Pro klientky, které chtějí podpořit vzhled pleti, pružnost, sjednocení tónu či zmenšení vzhledu póru.

Pro koho je vhodné modré světlo?

Pro pleť se sklony k nedokonalostem, která potřebuje zklidnění.

Kdy použít fialové světlo?

Kdykoli chcete spojit účinky modrého a červeného světla – například u pleti se sklonem k akné, která je zároveň citlivá.

K čemu slouží žluté světlo?

Podporuje vstřebávání kosmetických přípravků, podporuje metabolismus buněk a je vhodné po kosmetických peelingových procedurách.

Jak pomáhá zelené světlo?

Podporuje sjednocení tónu pleti, zklidnění a redukci jemného zarudnutí.

K čemu slouží oranžové světlo 610 nm?

Pracuje na projasnění pleti, podpoře cirkulace a zlepšení vzhledu pigmentových skvrn.

Mohou LED světla nahradit kosmetické přístroje či invazivní postupy?

Ne, LED terapie je doplňkovou relaxační metodou v kosmetické péči, nikoli náhradou za lékařské nebo invazivní zákroky.

Může LED terapie způsobit podráždění?

Vzácně. Pokud se objeví začervenání nebo diskomfort, doporučuje se terapii zkrátit nebo dočasně přerušit.

Je LED světlo UV záření?

Ne, LED panel nevyzařuje UV záření, takže nehrozí UV poškození pokožky.

Mohou LED světla používat i klientky s opálenou či citlivou kůží?

Ano, většinou ano, ale vždy sledujte reakci pleti.

Lze LED terapii kombinovat s kosmetickým čištěním?

Ano, často se používá po nebo před čištěním pleti podle typu procedury.

Je vhodné LED světlo po mechanickém peelingu?

Ano, zejména žluté světlo, které napomáhá zklidnění a regeneraci.

Mohou klientky používat LED terapii během těhotenství?

Použití během těhotenství doporučujeme vždy konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Mohou LED světla používat klientky s pigmentovými skvrnami?

Ano, zejména zelené a oranžové světlo se používá k projasnění a sjednocení tónu pleti.

Je vhodné LED používat po aplikaci sér?

Ano, LED světlo může podpořit vstřebávání kosmetických přípravků.

Musí mít klientky během ošetření chráněné oči?

Ano, používejte ochranné brýle.

Může LED terapie ovlivnit make-up?

Terapie se provádí na odlíčenou pleť, make-up může blokovat účinky světla.

Jak dlouho trvá viditelný efekt na pleti?

Záleží na pravidelnosti. Účinky jsou postupné a nejlepší výsledky se dostavují při pravidelném používání.

Je nutné přístroj před použitím zahřát?

Ne, LED diody nevyžadují žádné zahřívání. Přístroj je připraven ihned po zapnutí.

Je přístroj vhodný pro všechny typy pleti?

Ano, obecně je vhodný pro většinu typů pleti. Jen u velmi reaktivní pleti doporučte kratší expozici.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrch přístroje udržujte čistý. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě žádné ostré předměty, které by mohly poškodit povrch přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj s fotonovou terapií LIGHTPANEL PROFESSIONAL EXCLUSIVE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2924W**

EAN: **8594166124370**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2021

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 55014-2:2021

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt není zdravotnický prostředek. Slouží pro relaxační účely.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.




SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.3.2025