

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj **BeautyRelax BR-2030**

MULTIBRUSH



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	5
OPTIMÁLNÍ POSTUP OŠETŘENÍ PLETI	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	8
NABÍJENÍ BATERIE	8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	10
CERTIFIKACE	10
DOVOZCE	10
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	11

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Pokud se přístroj poškodil nebo nepracuje správně, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání neneset distributor odpovědnost.



OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax Multibrush BeautyRelax BR-2030
- Napájecí USB kabel
- Návod k obsluze

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



HLAVNÍ VÝHODY

- 4 vyměnitelné aplikátory
- 1. Aplikáční hlavice s krátkými štětinkami - intenzivní čištění pleti
- 2. Aplikáční hlavice se silikonovými štětinkami - intenzivní peeling pleti
- 3. Aplikáční hlavice s dlouhými štětinkami - zapracování kosmetických krémů
- 4. Aplikáční hlavice s masážními kuličkami - okamžitá podpora lymfatického systému obličeje
- 3 úrovně nastavení rychlosti rotace hlavice
- Jednoduché a bezpečné použití
- Vodotěsná ochrana IPX7 (za předpokladu pečlivé aplikace krytu vstupu pro napájení)

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Provozní napětí: 5V
- Provozní proud: 200mA
- Napájení: USB kabelem (součástí balení)
- Kapacita baterie: 800mAh
- Délka nabíjení: 3 až 4 hodiny
- Rozměry: 19x4x4cm
- Hmotnost: 290g

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Kosmetický přístroj BeautyRelax Multibrush poskytuje multifunkční pleťovou péči. Součástí balení jsou 4 vyměnitelné aplikáční hlavice s odlišným účelem použití. Jako byste měli čtyři přístroje v jednom. Používání je bezpečné, jednoduché s maximální účinností. Přístroj je vodotěsný. Ideální pro každodenní rutinní péči. Pro čistou, krásnou a zářivou pleť!

OPTIMÁLNÍ POSTUP OŠETŘENÍ PLETI



1. *Základní čištění pleti pomocí aplikátoru v prvním kroku s krátkými štětinkami a čistícího krému*



2. *Hlubkový peeling pleti pomocí aplikátoru se silikonovými štětinkami*



3. *Rozetření a zapracování vyživujícího krému pomocí aplikátoru s dlouhými štětinkami*



4. *Závěrečná podpora lymfatického systému obličeje v posledním kroku pomocí aplikátoru s kuličkami*

POPIS PŘÍSTROJE



1. Rotační aplikační hlavice
2. Aplikační hlavice s krátkými štětinkami
3. Aplikační hlavice s dlouhými štětinkami
4. Aplikační hlavice se silikonovými štětinkami
5. Aplikační hlavice s masážními kuličkami
6. Tlačítko **ON/OFF**
7. Stojánek
8. Vstup pro napájecí kabel (na spodní straně přístroje)

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Nasadte na rotační osu vámi zvolený aplikátor. Vždy dbejte na to, aby hlavice přesně dosela na rotační osu. V opačném případě by při větším použití tlaku na rotační osu mohlo dojít k poškození spodní části aplikační hlavice.



2. Stiskněte tlačítko **ON/OFF**. Aplikační hlavice se pohybuje rychlostí 1 (nízká). Činnost přístroje potvrzují modře podsvícení tlačítka **ON/OFF**.
3. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete pohyb hlavice s rychlostí 2 (střední).
4. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete pohyb hlavice s rychlostí 3 (vysoká).
5. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** přístroj vypnete.
6. V průběhu pohybu aplikační hlavice můžete kdykoliv dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** změnit směr pohybu otáčení. Rychlost pohybu aplikační hlavice zůstane stejná.
7. S přístrojem se po pleti pohybujte dle pasáže - **METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU**

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí Li-ion baterii 800mAh.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Průběh nabíjení signalizuje červené světlo.
4. Nabíjení může trvat až 4 hodiny v závislosti na kondici baterie.
5. Jakmile je baterie plně nabitá, tlačítko ON/OFF svítí zeleně.

Upozornění: Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Všechny vyměnitelné aplikátory umývejte pod běžným proudem vody. Před dalším použitím ponechte vysušit přirozeně na suchém místě. Přístroj je vodotěsný. Rovněž můžete omýt vodou. Přístroj nesmí být do vody ponořen. Vždy dbejte na to, aby byl zakryt vstup pro nabíjecí kabel pryžovou krytkou. Pro údržbu přístroje nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

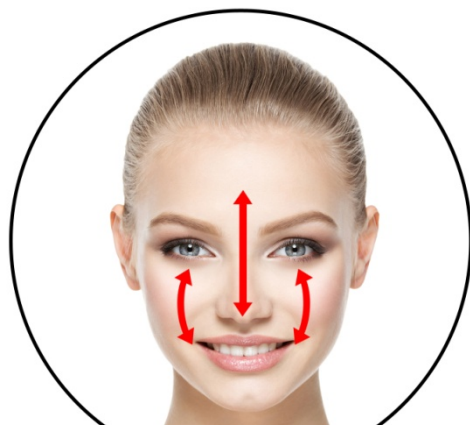

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj MULTIBRUSH

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2030**

EAN: **8594166118768**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

Dle registračního čísla certifikátu: ATL20180122034E

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 27.4.2021