

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-3106
PLASMAFORCE PROFESSIONAL STUDIO



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
SLOVO ÚVODEM	5
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	6
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	7
PRO KOHO NENÍ PŘÍSTROJ URČEN	8
UPOZORNĚNÍ	8
DŮLEŽITÉ RADY PRO SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ	9
POUŽÍVÁNÍ GUMOVÝCH RUKAVIC PŘI POUŽITÍ PŘÍSTROJE	11
TECHNOLOGIE STUDENÉ PLAZMY V KOSMETICE	13
CO JE STUDENÁ PLAZMA?	13
JAK STUDENÁ PLAZMA ČISTÍ PLEŤ?	14
HLAVNÍ VÝHODY PRO PLEŤ	14
KDO BY MĚL PLAZMOVOU TECHNOLOGII VYZKOUŠET?	14
HISTORIE TECHNOLOGIE	15
PRINCIP FUNGOVÁNÍ	15
BENEFITY PRO PLEŤ	15
FREKVENCE POUŽITÍ	16
PLASMOVÝ TOK S OZONEM	16
JAK TECHNOLOGIE FUNGUJE?	16
PŘÍNOSY TECHNOLOGIE PLASMOVÉHO TOKU S OZONEM	17
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DÉLKU APLIKACE	17
JAK ČAS ROZDĚLIT?	18
CO OVLIVŇUJE DÉLKU APLIKACE?	18
DOPORUČENÍ PRO OPTIMÁLNÍ ČASOVÁNÍ	18
ANTI-AGING EFEKT STUDENÉ PLAZMY: JAK DOCHÁZÍ K REDUKCI VRÁSEK?	19
SHRNUTÍ	21
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	22
VLASTNOSTI & SPECIFIKACE	24
IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH	25
TECHNICKÉ PARAMETRY	26
OBSAH BALENÍ	26
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	27
POPIS PŘÍSTROJE	28
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	29
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	30
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	31
METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU	32
ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU	33
INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA	33
OBRÁZKOVÁ GALERIE	34
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	47
CERTIFIKACE	47
EU DISTRIBUTOR	47
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	48
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	49

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – estetické přístroje pro domácí péči i profesionální provozy

BeautyRelax je česká značka zaměřená na vývoj a distribuci estetických přístrojů určených pro široké spektrum uživatelů. Od roku 2010 přinášíme řešení, která nacházejí uplatnění jak v domácí péči, tak v kosmetických salonech, wellness centrech a dalších profesionálních provozech. Díky širokému sortimentu si u nás může vybrat každý – od běžných uživatelů hledajících komfortní péči v domácím prostředí až po profesionály, kteří potřebují spolehlivé přístroje pro každodenní práci.

Jeden sortiment, mnoho možností využití

Přístroje BeautyRelax jsou navrženy s ohledem na různé úrovně zkušeností i rozdílné nároky na provoz. Nabídka zahrnuje jednodušší modely vhodné pro domácí použití i technicky pokročilejší zařízení určená pro profesionální prostředí.

Použité technologie vycházejí z běžně využívaných postupů v oblasti estetické péče, například:

- Radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud

Každý produkt je určen k používání v souladu s návodem výrobce a platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Pro domácí uživatele

Pro jednotlivce, kteří preferují péči v pohodlí domova, nabízí BeautyRelax přístroje:

- s jednoduchým ovládáním
- určené pro pravidelné osobní použití
- umožňující přizpůsobit péči individuálním potřebám

Domácí přístroje jsou navrženy tak, aby se mohly stát součástí běžné rutiny péče o pleť, tělo nebo vlasy.

Pro salony a profesionální provozy

Pro kosmetická studia, salony a wellness zařízení je v nabídce řada přístrojů:

- vhodných pro častější provoz
- s širšími možnostmi nastavení
- určených pro profesionální použití

Profesionální uživatelé mohou vybírat zařízení podle zaměření provozu, typu poskytovaných služeb a individuálních preferencí.

Přehled kategorií přístrojů

- **Kosmetické přístroje** – určené k péči o vzhled a komfort pleti
- **Přístroje pro péči o tělo** – zaměřené na estetickou péči o postavu
- **Masážní přístroje** – vhodné pro relaxaci a regeneraci
- **IPL přístroje** – určené k dlouhodobému omezení růstu chloupků při pravidelném používání

Výběr konkrétního přístroje vždy závisí na individuálních potřebách, zkušenostech uživatele a způsobu použití.

Každý si vybere to své

Ať už hledáte přístroj pro osobní péči doma, nebo zařízení pro profesionální salon, BeautyRelax nabízí široké spektrum možností. Díky rozmanité nabídce modelů, rozdílným technickým parametrům a různým úrovním obsluhy si u nás najde řešení každý uživatel. Rádi vám pomůžeme s výběrem přístroje, který bude odpovídat vašim požadavkům i plánovanému využití.

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením našeho produktu. Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte celý návod k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním pokynům a upozorněním. Přístroj používejte výhradně v souladu s uvedenými instrukcemi. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému používání přístroje a k jeho optimálnímu fungování.

Důležité informace před použitím

- Přístroj BeautyRelax spadá do kategorie kosmetických přístrojů. Nejedná se o zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění.
- Přístroj je určen pro neinvazivní kosmetickou aplikaci. Při správném použití dle návodu nedochází k mechanickému narušení integrity pokožky.
- Zařízení je vyrobeno v souladu s platnými technickými a bezpečnostními požadavky Evropské unie pro daný typ výrobku.
- Používání ochranných (např. jednorázových) rukavic může být vhodné zejména v profesionálním provozu z důvodu hygieny a ochrany obsluhy.
- Existují stavy, při kterých se použití přístroje nedoporučuje (viz kapitola Kontraindikace). Před použitím se s těmito informacemi seznámte.
- V případě nejasností ohledně použití přístroje se můžete obrátit na zákaznickou podporu:
Tel.: 737 196 160
- E-mail: mh@santadria.cz
- Odborný konzultant: Martin Hrbek

Návod k použití si uschovejte pro případné budoucí nahlédnutí.

Přejeme vám příjemné a bezpečné používání přístroje.

Tým BeautyRelax.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze, seznámte se s vyobrazeními a návod si uschovejte pro pozdější použití.

Pokud trpíte závažným kožním onemocněním nebo máte poškozenou či výrazně podrážděnou pokožku, přístroj nepoužívejte. V případě pochybností o vhodnosti použití se poraďte s lékařem.

Při komerčním používání přístroje je nutné dodržovat platné hygienické předpisy a zásady bezpečné práce.

Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený, nefunguje správně nebo pokud došlo k jeho pádu do vody. V takovém případě jej odpojte od napájení a kontaktujte servis.

Pokud je přístroj mechanicky poškozen, nedotýkejte se jeho vnitřních částí z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem.

Dojde-li k pádu přístroje na zem, může být narušena jeho funkčnost nebo bezpečnost. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na servisní oddělení.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí (např. vana, sprcha, bazén).

Přístroj ani jeho části neponořujte do vody a nevystavujte je tekoucí vodě.

Přístroj nenechávejte během provozu bez dozoru. Po každém použití jej vždy vypněte a odpojte od napájení.

Pokud byl přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí, vyčkejte před použitím minimálně 3 hodiny, aby se předešlo kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení.

Přístroj není určen pro používání dětmi ani osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi bez dozoru odpovědné osoby.

Nepokládejte ani nepoužívejte přístroj na horkých površích nebo v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátor, kamna).

Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat ani opravovat. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.

Přístroj skladujte v suchém a čistém prostředí, chráněném před prachem a přímým slunečním zářením.

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

PLASMAFORCE PROFESSIONAL STUDIO je přístroj určený výhradně pro kosmetické účely v rámci péče o pleť. Přístroj není zdravotnickým prostředkem ve smyslu platné legislativy Evropské unie ani České republiky. Není určen k diagnostice, léčbě, zmírnění nebo prevenci jakéhokoli onemocnění. Technologie přístroje je navržena pro neinvazivní kosmetické aplikace. Při správném používání v souladu s návodem k obsluze nedochází k narušení integrity pokožky. Přístroj nevyužívá jehly ani jiné invazivní prvky a žádná část aplikačních hlavic neproniká pod povrch pokožky. Účinky přístroje jsou určeny výhradně pro kosmetickou péči o vzhled pokožky. Jakákoli tvrzení týkající se zdravotních účinků nejsou výrobcem ani distributorem deklarována.



Podmínky používání v komerčním provozu

V případě komerčního využití přístroje se doporučuje, aby obsluhující osoba měla odpovídající odbornou kvalifikaci v oblasti kosmetických služeb dle platných právních předpisů. Rozsah oprávnění k používání přístroje v komerčním provozu se řídí právními předpisy platnými v zemi jeho používání. Provozovatel je povinen zajistit, že používání přístroje odpovídá místní legislativě, zejména požadavkům na odbornou způsobilost, hygienické předpisy a podmínky poskytování kosmetických služeb.

PRO KOHO NENÍ PŘÍSTROJ URČEN



Přístroj **není doporučeno používat osobami**, kterých se týká některý z těchto stavů:

Absolutní omezení použití (použití je zakázáno):

- **Kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení**
Plazma generuje elektromagnetické pole, které může narušit funkci přístrojů.
- **Aktivní onkologické onemocnění (zejména v oblasti aplikace)**
Plazma může stimulovat buněčný metabolismus, což není vhodné při nádorech.
- **Těhotenství a kojení**
Neexistují dostatečné studie prokazující bezpečnost pro plod nebo novorozence.
- **Čerstvé popáleniny nebo otevřené rány**
Podpora přirozených regeneračních procesů pokožky po kosmetických zákrocích.
- **Epilepsie**
Světelné efekty nebo vysokofrekvenční pulzy mohou vyvolat záchvat.

Relativní omezení použití (použití pouze po konzultaci s lékařem):

- **Aktivní opar (herpes simplex)**
Plazma může šíření viru zhoršit.
- **Rosacea nebo těžká forma akné s cystami**
Zánětlivá pokožka může reagovat přecitlivěle.
- **Autoimunitní onemocnění (lupus, sklerodermie)**
Plazma může u některých pacientů vyvolat nežádoucí imunitní reakci.
- **Poruchy srážlivosti krve nebo užívání antikoagulancií**
Riziko podlitin při kombinaci s mechanickým působením přístroje.
- **Silně poškozená kožní bariéra (např. těžký ekzém)**
Plazma může vysušovat a dráždit již narušenou pokožku.

UPOZORNĚNÍ

Vaše bezpečnost je pro nás prioritou. Proto jsme pro vás připravili podrobný přehled situací, kdy není vhodné náš přístroj používat. Tato omezení se týkají především závažných zdravotních stavů. Pokud jste zdraví a váš lékař vám výhradně nezamezil kosmetickou péčí o pleť, můžete přístroj bez obav používat. Doporučujeme však vždy naslouchat svému tělu - pokud během používání pocítíte jakékoliv nepohodlí, okamžitě přerušte proceduru. Náš přístroj byl navržen s důrazem na bezpečnost a pohodlí uživatelů. Jeho konstrukce a funkce jsou optimalizovány tak, aby vám poskytly příjemnou relaxaci, krásnou a zdravě vyhlížející pleť.

DŮLEŽITÉ RADY PRO SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ

1. Příprava před použitím

Nepoužívejte přístroj, pokud se na vás vztahuje některý z bodů uvedených v kapitole **Kontraindikace**. V případě pochybností o zdravotním stavu se před použitím poraďte s lékařem nebo dermatologem.

- **Očistěte pleť** – Odstraňte make-up, mastnotu a povrchové nečistoty.
- **Pleť musí být suchá** – Před zahájením aplikace vyčkejte, dokud pokožka zcela neoschne.
- **Nepoužívejte kovové nebo silně vodivé kosmetické přípravky** bezprostředně před aplikací.
- **Proveďte test snášenlivosti** – Před prvním použitím doporučujeme aplikovat malou plochu pokožky (např. předloktí) a vyčkat několik minut, zda nedojde k nežádoucí reakci.

2. Během aplikace

- **Vzdálenost od pokožky:**
Držte aplikátor přibližně 1–4 mm od povrchu pokožky. Při použití se můžete aplikátorem letmo dotýkat k pleti.
- **Plynulý pohyb:**
Hlavici pohybuje pomalu a rovnoměrně. Neponechávejte aplikátor na jednom místě déle než přibližně 5–10 sekund.
- **Citlivé oblasti:**
Vyhněte se přímé aplikaci na oblast očí, rtů, sliznic, otevřených ran a výrazně vystouplých znamének.
- **Nepříjemné pocity:**
Pokud se objeví výrazné pálení, bolest nebo jiný nepříjemný pocit, aplikaci přerušte.

3. Po aplikaci

- **Hydratace:**
Po aplikaci naneste zklidňující nebo hydratační přípravek vhodný pro váš typ pleti (např. s panthenolem, aloe vera nebo kyselinou hyaluronovou).
- **Ochrana před sluncem:**
Doporučuje se omezit přímé sluneční záření po dobu minimálně 24 hodin a použít ochranný přípravek s odpovídajícím SPF.
- **Další kosmetické procedury:**
Intenzivní kosmetické zákroky (např. chemický peeling, atp.) konzultujte s odborníkem a dodržujte doporučené časové rozestupy.

4. Frekvence používání

Frekvence použití závisí na typu pleti a individuální reakci pokožky.

- **Začátečníci:** obvykle 1× týdně.
- **Pokročilé používání:** 2–3× týdně dle tolerance pleti.
- **Mezi aplikacemi** doporučujeme ponechat pokožce dostatečný čas na regeneraci (obvykle alespoň 48 hodin).

Nepřekračujte doporučenou dobu aplikace uvedenou v návodu.

5. Údržba přístroje

- **Čištění:**

Po každém použití otřete aplikátor dezinfekčním prostředkem vhodným pro kosmetické nástroje (např. přípravek na bázi alkoholu).

- **Skladování:**

Uchovávejte v suchém prostředí, mimo dosah dětí a přímého slunečního záření.

- **Kontrola stavu:**

Pravidelně kontrolujte neporušenost napájecího kabelu a čistotu aplikátoru.

6. Varovné signály – kdy přerušit používání

Okamžitě přerušte používání přístroje, pokud se objeví:

- výrazné nebo přetrvávající zarudnutí,
- otok, puchýře nebo jiné neobvyklé kožní projevy,
- závratě, výrazné brnění nebo necitlivost.

V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře.

7. Vhodnost použití

Přístroj je určen pro dospělé osoby k neinvazivní kosmetické péči o pleť, zejména:

- pleť se sklony k nedokonalostem,
- pleť se ztrátou jasu,
- pleť působící unaveně.

Není určen pro děti a dospívající.

Důležité upozornění

Přístroj je určen výhradně pro kosmetické účely. Není zdravotnickým prostředkem a není určen k léčbě ani prevenci onemocnění. Individuální reakce pokožky se mohou lišit.

POUŽÍVÁNÍ GUMOVÝCH RUKAVIC PŘI POUŽITÍ PŘÍSTROJE



Používání gumových rukavic při aplikaci studené plazmy na pleť má několik důvodů, které souvisí s bezpečností, hygienou i efektivitou procedury. Zde je podrobné vysvětlení:

1. Ochrana před elektrickým proudem

Studená plazma se generuje pomocí vysokofrekvenčního elektrického výboje. I když je napětí nízké a pro uživatele bezpečné, rukavice:

- Zabraňují nežádoucímu uzavření elektrického obvodu (např. pokud byste se dotkli kovových částí přístroje mokřýma rukama).
- Chrání před statickou elektřinou, která by mohla ovlivnit stabilitu plazmatu.

2. Hygiena a prevence kontaminace

- Bariéra proti bakteriím: Rukavice zabraňují přenosu mikroorganismů z rukou na aplikovanou pleť (zvláště důležité u akné nebo poškozené pokožky).
- Ochrana obsluhy přístroje: Pokud přístroj používá profesionál (v salonu), rukavice chrání jeho pokožku před opakovaným vystavením plazmě.

3. Lepší kontrola aplikace

- Gumové rukavice zlepšují přilnavost – usnadňují manipulaci s přístrojem a přesné vedení aplikátoru.
- Zabraňují klouzání (např. když jsou ruce vlhké od krému nebo plazmového roztoku).

4. Ochrana citlivé pokožky rukou

Při častém používání může plazma:

- Vysušovat pokožku rukou (reaktivní částice mohou narušit lipidovou bariéru).
- Zvyšovat citlivost u lidí s ekzémy nebo alergiemi.

Jaké rukavice použít?

- Nitrile (nitrilové): Odolné, nealergenní, vhodné pro práci s plazmou.
- Latexové: Levnější, ale mohou způsobovat alergie.
- Vinylové: Vhodné pro jednorázové použití.

Gumové rukavice nejsou jen formální doporučení – jsou praktickou nutností pro bezpečnou, hygienickou a efektivní aplikaci studené plazmy.

TECHNOLOGIE STUDENÉ PLAZMY V KOSMETICE: **REVOLUCE V ČIŠTĚNÍ A REGENERACI PLETI**



V posledních letech zažívá kosmetický průmysl boom inovativních technologií, které slibují nejen dokonalou krásu, ale také vědecky podložené výsledky. Mezi nejzajímavější objevy patří studená plazma – technologie, která mění pravidla hry v péči o pleť, zejména v oblasti podpory čistoty povrchu pokožky, léčby akné a anti-agingu. Pojdme se podívat, jak tento „čtvrtý stav hmoty“ funguje a proč byste ho měli zařadit do své skincare rutiny.

CO JE STUDENÁ PLAZMA?

Plazma je ionizovaný plyn, který obsahuje volné elektrony, ionty a neutrální částice. Tvoří 99 % viditelného vesmíru (hvězdy, blesky) a díky své schopnosti generovat reaktivní částice se využívá v medicíně, průmyslu i kosmetice.

JAK STUDENÁ PLAZMA ČISTÍ PLEŤ?

Klíčovou vlastností studené plazmy je generování reaktivních kyslíkových a dusíkových částic (ROS a RNS), jako jsou ozon, oxid dusnatý nebo hydroxylové radikály.

Tyto molekuly působí jako přírodní „dezinfekce“:

- Pomáhá snižovat množství nežádoucích mikroorganismů na povrchu pokožky – Technologie je určena pro kosmetickou aplikaci pleti a přispívá k jejímu hygienickému použití.
- Napomáhá narušení povrchových struktur mikroorganismů – V rámci kosmetického použití může působit na mikroorganismy běžně se vyskytující na pokožce, včetně bakterií spojených s problematickou pletí (např. Cutibacterium acnes).
- Podporuje narušení povrchových biofilmových struktur – Při kosmetické aplikaci může přispívat ke zlepšení čistoty povrchu pokožky.
- Šetrná kosmetická aplikace pokožky – Při správném použití dle návodu je technologie určena pro neinvazivní péči o pleť bez mechanického narušení její integrity.

Studie potvrzují:

- Výrazné snížení mikrobiální zátěže povrchu pokožky (dle dostupných odborných poznatků o studené plazmě).

HLAVNÍ VÝHODY PRO PLEŤ

1. Kosmetická péče o problematickou pleť se sklony k akné a začervenání – Eliminuje bakterie, snižuje zánět a reguluje tvorbu kožního mazu.
2. Podpora přirozených regeneračních procesů pokožky po kosmetických zákrocích – Optické zjemnění vzhledu vrásek při pravidelném používání.
3. Anti-aging efekt – Redukuje vrásky, rozjasňuje pigmentové skvrny a zlepšuje elasticitu.
4. Příprava na zákroky – Dezinfikuje pleť před chemickým peelingem nebo laserem.

KDO BY MĚL PLAZMOVOU TECHNOLOGII VYZKOUŠET?

- Majitelé aknézní nebo problematické pleti.
- Lidé s citlivou pokožkou, kteří nesnášejí agresivní antiseptika.
- Zájemci o neinvazivní lifting bez jehel.
- Kosmetická studia pro zvýšení ničení bakterií, virů a plísní.

Bezpečnost a vedlejší účinky

- Mírné zarudnutí (do 30 minut).
- Pocit „štípání“ u velmi citlivé pleti.

Studená plazma není sci-fi, ale dostupná technologie, která spojuje vědu s krásou. Její schopnost podpory čistoty povrchu pleti z ní dělá ideálního spojence pro každého, kdo touží po zdravé a zářivé pleti. Ať už investujete do profesionálního přístroje do salonu, nebo pro domácí použití, studená plazma vás nezlame.

HISTORIE TECHNOLOGIE

Studená plazma není novým objevem – její kořeny sahají až do 19. století, kdy vědci začali zkoumat ionizované plyny. Klíčové milníky:

- 1928: Americký chemik Irving Langmuir poprvé použil termín „plazma“.
- 90. léta: Plazma se začala využívat v medicíně pro sterilizaci nástrojů a hojení ran.
- 2010: První kosmetické přístroje se studenou plazmou vstupují na trh, zejména v Jižní Koreji a Německu.
- 2020: Schválení pro plazmové přístroje na potlačení projevů akné.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Studená plazma je ionizovaný plyn s unikátními vlastnostmi:

Vznik: Elektrický výboj rozbije molekuly plynu (obvykle vzduchu nebo helia) na ionty, elektrony a reaktivní částice.

Bezpečnost: Teplota plynu nepřesahuje 40 °C (odtud „studená“ plazma).

Účinné látky: Generuje ROS (reaktivní formy kyslíku) a RNS (reaktivní formy dusíku). Pomáhá snižovat množství nežádoucích mikroorganismů na povrchu pokožky.

BENEFITY PRO PLEŤ

Čistota pleti – Přispívá k hygienické aplikaci pokožky a pomáhá snižovat množství nežádoucích mikroorganismů na jejím povrchu.

Problematická pleť se sklony k akné – Při pravidelném kosmetickém použití může napomoci ke zlepšení vzhledu pleti se sklonem k nadměrné tvorbě kožního mazu.

Anti-aging efekt – Při pravidelném používání může přispět k optickému zjemnění vzhledu jemných linek a k celkovému sjednocení vzhledu pleti.

Podpora přirozené regenerace pokožky po kosmetických aplikacích – Vhodné jako doplňková péče po neinvazivních kosmetických procedurách (např. mikrodermabrazí). Použití po invazivních nebo lékařských zákrocích je nutné konzultovat s odborníkem.

Šetrnost – Technologie je určena pro neinvazivní kosmetické aplikaci. Při správném použití dle návodu je vhodná i pro citlivou pleť. Individuální reakce pokožky se mohou lišit.

FREKVENCE POUŽITÍ

- Pro akné: 2x až 3x týdně.
- Pro anti-aging: 1x týdně.

PLASMOVÝ TOK S OZONEM **REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE V PÉČI O PLEŤ**

Stárnutí pleti je přirozený biologický proces, který se projevuje postupnými změnami vzhledu pokožky. Pleť může působit tenčí, méně pružná, mohou se objevovat pigmentové nerovnosti, výraznější vrásky a změny kontur obličeje. Technologie plazmového toku s aktivací okolního vzduchu je určena pro neinvazivní kosmetickou aplikaci pleti. Při pravidelném používání může přispět k celkovému zlepšení vzhledu pokožky, jejímu projasnění a optickému sjednocení tónu. Na rozdíl od některých invazivních estetických metod je tato technologie zaměřena na povrchové kosmetické použití bez mechanického narušení integrity pokožky. Aplikace podporuje přirozený vzhled pleti a může být součástí pravidelné kosmetické péče zaměřené na udržení její vitality.

JAK TECHNOLOGIE FUNGUJE?

Keramická plocha aplikátoru generuje elektrické napětí o vysoké frekvenci. Při přiblížení hlavičky k pokožce na vzdálenost přibližně 1–4 mm dochází ke vzniku řízeného plazmového výboje mezi aplikátorem a povrchem pokožky. Při použití se můžete aplikátorem letmo dotýkat k pleti. V průběhu tohoto procesu dochází k aktivaci okolního vzduchu a ke krátkodobé tvorbě reaktivních forem kyslíku, včetně stopového množství ozonu. Technologie je určena pro kosmetické aplikování pokožky. Může přispívat k hygienické aplikaci povrchu pleti a ke snížení množství nežádoucích mikroorganismů přirozeně se vyskytujících na jejím povrchu. Aplikace je zaměřena na podporu čistoty a celkového vzhledu pleti. Nejedná se o zdravotnickou dezinfekci ani o léčebný zákrok. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické účely. Není zdravotnickým prostředkem a není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění.

PŘÍNOSY TECHNOLOGIE PLASMOVÉHO TOKU S OZONEM

- Výrazné snížení mikrobiální zátěže povrchu pokožky (dle dostupných odborných poznatků o studené plazmě).
- Prevence vzniku akné, zánětů a kožních defektů.
- Podpora elasticity a pružnosti pokožky.
- Zpomalení stárnutí a redukce jemných vrásek.
- Rozjasnění tónu pleti a celkové zlepšení její textury.
- Okamžitý osvěžující efekt.
- Přírodní cesta bez použití chemie. Technologie pracuje pouze se vzdušným kyslíkem.
- Skvělá volba pro profesionální kosmetické salony

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DÉLKU APLIKACE

Typ pleti:

- Citlivá pleť
- Mastná nebo problematická pleť

Nastavená intenzita přístroje:

- Nižší výkon → delší expozice
- Vyšší výkon → kratší expozice

Cíl aplikace:

- Běžná desinfekce → kratší doba
- Intenzivní ničení bakterií, virů a plísní → mírně delší expozice

Časový odhad pro různé typy aplikace:

Základní aplikace (preventivní desinfekce pleti)

3 až 5 minut (rychlejší pohyb přístrojem, kratší expozice na jednotlivé zóny)

Intenzivnější aplikace (pro aknézní nebo problematickou pleť)

5 až 8 minut (déle se zaměřuje na problematické oblasti, např. T-zóna)

Aplikace s kombinací dalších funkcí (např. plazma + LED terapie)

8 až 12 minut (pokud přístroj kombinuje více technologií)

JAK ČAS ROZDĚLIT?

- Každá část obličeje (čelo, tvář, brada, nos) by měla být aplikována 30 až 60 sekund.
- Problémové oblasti (místa s akné, většími póry) lze aplikovat déle 1 až 2 minuty.
- Přístroj by se měl plynule pohybovat, aby nedošlo k přehřátí nebo podráždění.

CO OVLIVŇUJE DÉLKU APLIKACE?

- Velikost aplikované oblasti (pouze obličej vs. obličej + krk + dekolt)
- Nastavení přístroje (nízká/vyšší intenzita)
- Typ pleti (citlivá pleť = kratší doba)
- Cíl aplikace (pouze desinfekce vs. hloubková sterilizace)

DOPORUČENÍ PRO OPTIMÁLNÍ ČASOVÁNÍ

- První aplikace: Začněte s 3 až 4 minutami a sledujte reakci pleti.
- Pravidelná péče: Při opakovaném použití lze postupně prodloužit na 5 až 7 minut.
- Pokud používáte plazmu spolu s jinou kosmetikou (např. sérum), nechte ji nejprve vsáknout, aby nedošlo k reakci s plazmou.



ANTI-AGING EFEKT STUDENÉ PLAZMY: **JAK DOCHÁZÍ K REDUKCI VRÁSEK?**

Studená plazma je v kosmetické praxi využívána jako neinvazivní technologie zaměřená na podporu celkového vzhledu pleti. Působí na povrchu pokožky a prostřednictvím aktivovaných forem kyslíku přispívá k jejímu osvěžení a optickému zlepšení kvality.

Níže jsou popsány mechanismy, které jsou dle dostupných odborných poznatků spojovány s kosmetickým využitím studené plazmy:

1. Optické zjemnění vzhledu jemných linek

Proces: Aktivace povrchu pokožky může podpořit přirozené biologické procesy kůže související s jejím pevnějším a svěžejším vzhledem.

Důsledek:

- Pokožka může působit hladší a kompaktnější.
- Jemné linky mohou být při pravidelném kosmetickém použití méně viditelné.

Individuální výsledky se mohou lišit.

2. Podpora ochrany před vnějšími vlivy

Proces: Technologie pracuje s aktivací okolního vzduchu a může přispět k omezení negativního působení faktorů prostředí na vzhled pokožky.

Důsledek:

- Pokožka může působit vitálněji.
- Může docházet k optickému zpomalení projevů únavy pleti.

Nejedná se o prevenci ani léčbu stárnutí.

3. Podpora mikrocirkulace a svěžího vzhledu

Proces: Kosmetická aplikace může dočasně stimulovat povrchovou mikrocirkulaci.

Důsledek:

- Pleť může působit projasněně a svěže.
- Bezprostředně po aplikaci může být patrný revitalizační efekt.

4. Obnova povrchové vrstvy pokožky

Proces: Aplikace může napomáhat odstranění odumřelých buněk z povrchu pokožky.

Důsledek:

- Jemnější textura pleti.
- Lepší vstřebávání následně aplikovaných kosmetických přípravků.

5. Vhodné pro citlivou pleť

Technologie je určena pro neinvazivní kosmetickou aplikaci bez mechanického narušení integrity pokožky. Při správném použití dle návodu je vhodná i pro citlivější typy pleti. Individuální reakce se mohou lišit.

Časový horizont účinku

Krátkodobě (po 1–2 aplikacích):

- Pleť může působit hladší a projasněnější.
- Může být patrný osvěžující efekt.

Dlouhodobě (při pravidelném používání):

- Může docházet k podpoře přirozeného vzhledu pevnější pleti.
- Jemné linky mohou být méně výrazné opticky.

Nejedná se o trvalé strukturální změny kůže ani o náhradu lékařských estetických zákroků.

Typy vrásek

Kosmetická aplikace je primárně určena pro:

- jemné mimické linky,
- pleť se ztrátou jasu,
- pokožku působící unaveně.

U hlubších strukturálních vrásek může být efekt omezený a individuální.

Doporučení pro maximální kosmetický efekt

Pro podporu vzhledu pleti lze kombinovat s běžnou kosmetickou péčí, například:

- hydratačními přípravky (např. s kyselinou hyaluronovou),
- antioxidanty (např. vitamin C),
- přípravky s SPF ochranou.

SHRNUTÍ

Studená plazma představuje moderní směr v kosmetické péči, který propojuje technologickou preciznost se šetrným, neinvazivním přístupem k pokožce. Je vhodná pro osoby, které chtějí podpořit svěží vzhled pleti, pečovat o pleť se sklony k nedokonalostem nebo rozšířit úroveň hygienického standardu ve své kosmetické praxi. Technologie je určena pro kosmetické použití a může být součástí pravidelné péče o pleť. Její využití v kosmetologii se postupně rozšiřuje v návaznosti na nové odborné poznatky a technologický vývoj.

„Plazma nepředstavuje žádný zázrak, ale technologický posun v oblasti kosmetické péče. Lze ji vnímat jako moderní nástroj, který podporuje přirozený vzhled a svěžest pokožky,“ uvádí kosmetička Marta Uhlířová.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI



1. Co je studená plazma (Cold Plasma) a jak funguje?

Studená plazma je ionizovaný plyn o nízké teplotě, který při kosmetickém použití vytváří aktivované částice kyslíku a dusíku. Tyto částice mohou přispívat k hygienickému použití na povrchu pokožky a k jejímu svěžímu vzhledu.

Technologie je určena výhradně pro kosmetické účely.

2. Na jaké typy pleti je přístroj vhodný?

Přístroj je určen pro neinvazivní kosmetické aplikace pleti, zejména:

- pleť se sklony k nedokonalostem,
- pleť se ztrátou jasu a elasticity,
- pleť působící unaveně,
- doplňková péče po neinvazivních kosmetických použitích (např. mikrodermabraze).

Použití po lékařských nebo invazivních zákrocích je vhodné konzultovat s odborníkem.

3. Jak často lze přístroj používat?

Doporučená frekvence závisí na typu pleti a cíli kosmetické aplikace:

- běžná péče: 1–2× týdně,
- intenzivnější kosmetická péče: dle individuální potřeby, obvykle 2–3× týdně,
- po neinvazivních kosmetických použitích: dle doporučení odborníka.

Individuální reakce pokožky se mohou lišit.

4. Je použití studené plazmy bolestivé?

Aplikace je neinvazivní. Během aplikace lze vnímat mírné brnění nebo lehký chladivý efekt. Při správném použití dle návodu nedochází k mechanickému narušení integrity pokožky.

5. Jak dlouho trvá jedna aplikace?

Doba aplikace závisí na aplikované oblasti:

- obličej: přibližně 5–10 minut,
- lokální aplikace: obvykle 1–3 minuty na dané místo.

Konkrétní postup vždy přizpůsobte návodu k použití.

6. Lze přístroj kombinovat s jinými kosmetickými přípravky?

Ano. Před aplikací se doporučuje pleť důkladně odlíčit a očistit.

Po aplikaci je vhodné aplikovat hydratační přípravek odpovídající typu pleti (např. sérum s kyselinou hyaluronovou). Použití silně exfoliačních přípravků (např. AHA/BHA kyseliny) bezprostředně před nebo po aplikaci se doporučuje konzultovat s odborníkem.

7. Jak čistit a udržovat přístroj?

- Před a po použití otřete aplikační hlavici dezinfekčním prostředkem vhodným pro kosmetické nástroje (např. přípravek na bázi alkoholu).
- Přístroj není vodotěsný – neponořujte jej do vody.
- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.

8. Kdy lze očekávat viditelné výsledky?

Bezprostředně po aplikaci může pleť působit svěžeji a projasněněji.

Při pravidelném kosmetickém používání může docházet k postupnému zlepšení vzhledu pleti. Rychlost a rozsah viditelných změn jsou individuální a závisí na typu a stavu pokožky.

9. Je nutné používat ochranné pomůcky?

Při běžné kosmetické aplikaci není ochrana očí zpravidla nutná. Doporučuje se vyhnout přímé aplikaci oblasti otevřených očí.

U citlivější pleti je vhodné po aplikaci použít zklidňující nebo hydratační přípravek.

Přístroj je určen výhradně pro kosmetické účely.

Není zdravotnickým prostředkem a není určen k léčbě, prevenci ani diagnostice onemocnění.

V případě kožních onemocnění nebo zdravotních obtíží se obraťte na lékaře.

VLASTNOSTI & SPECIFIKACE

Šetrné neinvazivní použití

Přístroj pracuje neinvazivním způsobem. Při správném použití dle návodu nedochází k mechanickému narušení integrity pokožky.

Komfortní používání

Aplikace je obvykle vnímána jako komfortní. Během aplikace lze pociťovat mírné brnění nebo lehký chladivý efekt. Technologie je vhodná i pro citlivější typy pleti, přičemž individuální reakce se mohou lišit.

Bezpečnost

Zařízení je vyrobeno v souladu s platnými technickými a bezpečnostními požadavky Evropské unie. Používejte vždy dle návodu k použití.

Dlouhodobé používání

Přístroj je navržen pro opakované použití při dodržení doporučené údržby a skladování. Životnost zařízení závisí na způsobu používání a péči.

Vhodnost pro různé typy pleti

Určeno pro běžné typy pleti (suchá, mastná, smíšená, zralá). V případě velmi citlivé, podrážděné nebo poškozené pokožky doporučujeme před použitím konzultaci s odborníkem.

Oblasti použití

Přístroj je určen pro oblast tváře, krku a dekoltu.

Provoz bez spotřebního materiálu

Pro samotné fungování přístroje není nutné dokupovat speciální náplně či jednorázový spotřební materiál. Pro dosažení optimálního kosmetického efektu lze kombinovat s běžnou péčí o pleť dle individuálních potřeb.

Ekonomická péče

Zařízení představuje jednorázovou investici do kosmetického přístroje určeného k dlouhodobému používání. Nezahrnuje pravidelné povinné náklady na provoz.

Doporučená doba aplikace (obličej)

- Celková doba aplikace obličeje (čelo, tváře, nos, brada): přibližně 1–3 minuty.
- Jedna konkrétní zóna (např. jedna tvář): přibližně 10–30 sekund.
- Doporučená vzdálenost aplikátoru od pokožky: cca 1–4 mm. Při použití se můžete aplikátorem letmo dotýkat k pleti. Ohledně vzdálenosti vždy záleží na velikosti hlavičky a nastaveném výkonu.

IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH

Opakovaný výskyt aknézní pleti



Zvětšené póry



Výskyt svědění



Zvýšená mastnota pleti



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Technologie: plasma & ozon.
- Materiál aplikátoru: keramika.
- Aplikční hlavice: vyměnitelné 3 různé velikosti.
- Výkon: 27W.
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V.
- Rozměry: 38x32x13cm.
- Hmotnost: 2,5kg.

OBSAH BALENÍ

- 1x Kosmetický přístroj PLASMAFORCE PROFESSIONAL STUDIO.
- 1x Stojánek.
- 3x Aplikční hlavice s různým průměrem.
- 1x Napájecí kabel 220V.
- 1x Návod k obsluze.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Objevte revoluční přístup k aplikaci pleti, který spojuje sílu plazmového výboje a ozonu. Objevte moderní přístup ke kosmetickému použití na pleti, který propojuje technologii plazmového výboje s aktivací okolního vzduchu. **BeautyRelax PlasmaForce Professional Studio** je navržen pro neinvazivní kosmetickou péči o pleť na špičkové úrovni. Technologie plazmového toku vytváří jemný výboj působící na povrch pokožky. Aplikace je komfortní a při správném použití nedochází k narušení integrity pokožky. Přístroj je určen pro podporu hygienické aplikace na pleti a může přispívat ke snížení množství nežádoucích mikroorganismů přirozeně se vyskytujících na jejím povrchu. Při pravidelném používání může podpořit svěží, projasněný a sjednocený vzhled pokožky. **BeautyRelax PlasmaForce Professional Studio** = Moderní technologie pro kosmetickou péči o pleť.




POPIS PŘÍSTROJE

1. Velký aplikátor
2. Střední aplikátor
3. Malý aplikátor
4. Kosmetický přístroj
5. Vstup pro konektor napájecího adaptéru
6. Stojánek



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko **START/STOP**
3. Indikace nastaveného výkonu
4. Indikace nastaveného výkonu
5. Čas aplikace (v minutách)
6. Tlačítko **ZVÝŠENÍ** intenzity
7. Tlačítko **SNÍŽENÍ** intenzity

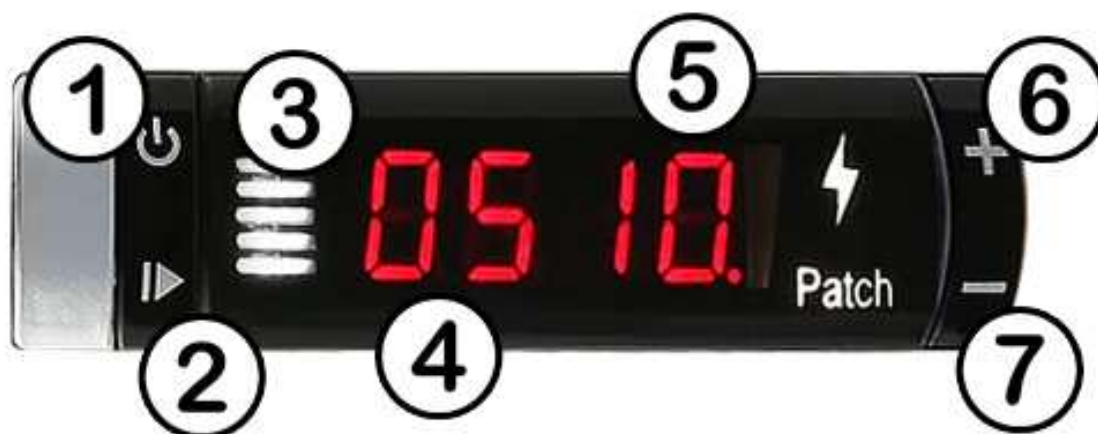

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Sundejte veškeré šperky jako např. náušnice, náhrdelníky, náramky, apod.
2. Odstraňte z pleti makeup. Dbejte důkladně na to, aby byla pokožka před použitím přístroje maximálně suchá. Výrazně tím zvýšíte komfort pro uživatele.
3. Zvolte aplikační hlavici dle velikosti, kterou potřebujete. K dispozici jsou 3 různé průměry. Výměnu aplikační hlavice provádějte vždy, když je přístroj vypnutý.
4. Nasaďte ochranné gumové rukavice.
5. Zapněte přístroj dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Aktivuje se displej.
6. Pomocí tlačítek **(+)** a **(-)** si můžete nastavit intenzitu. K dispozici je rozsah od 1 do 9. Intenzitu vždy nastavte tak, aby bylo uživateli působení plazmy příjemné.
7. Časovač je vždy primárně nastaven na hodnotu 10 minut.
8. Nyní je přístroj připraven k použití. Stiskem tlačítka **START/STOP** můžete zahájit použití na pleti. Připravenost přístroje k použití indikuje symbol blesku u nápisu **PATCH**.
9. Pomalu se pohybujte aplikační hlavicí po pleti. Plazmový výboj vznikne v případě, je-li aplikační hlavice v optimální vzdálenosti od pleti. Keramický aplikátor by se měl pohybovat ve vzdálenosti od pleti v rozsahu od 1mm do 4mm.
10. Hlavici se pohybujete po pleti v doporučených směrech v pasáži tohoto návodu k obsluze: **METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU**.
11. Aplikace pleti je naprosto bezbolestná. Během používání můžete cítit mírné aroma, které doprovází průběh působení plazmového toku. Akusticky můžete slyšet zvuk „prskání“, který doprovází proudění plazmového výboje.
12. Zaměřte se na vybrané části obličeje nebo dekoltu, kde potřebujete účinek přístroje nejvíce.
13. Aplikační hlavice se nesmí v průběhu aplikace pleti dostat do kontaktu s žádným kovovým předmětem.
14. Aplikační hlavici nemějte na jenom místě déle než 10 sekund.
15. Činnost přístroje můžete kdykoliv pozastavit pomocí tlačítka **START/STOP**.
16. Pomocí tlačítek **(+)** a **(-)** si můžete kdykoliv změnit intenzitu.
17. Pokožka může v oblasti aplikace mírně zarudnout. Jedná se o přirozený jev. Pleť se v řádu několika minut dostane do normálu.
18. Prvních několik aplikací pleti by nemělo přesáhnout délku 10 minut za den.
19. V průběhu aplikace neaplikujte žádný druh kosmetického přípravku.
20. Po použití přístroje na pleti doporučujeme použít váš oblíbený kosmetický přípravek, krém nebo sérum.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Neponechávejte aplikátor delší dobu na jednom místě.

Během aplikace se pohybujte aplikátorem plynule po aplikované oblasti bez zastavení.

Neinvazivní charakter použití.

PLASMAFORCE PROFESSIONAL STUDIO je kosmetický přístroj určený pro neinvazivní aplikaci.

Při správném použití dle návodu nedochází k mechanickému narušení integrity pokožky.

Soulad s technickými normami.

Přístroj je vyroben v souladu s platnými technickými a bezpečnostními požadavky Evropské unie pro daný typ zařízení.

Použití na čistou a suchou pleť.

Před aplikací nepoužívejte mastné, olejové ani hořlavé přípravky. Pokud pleť předem čistíte (např. micelární vodou nebo odličovacím přípravkem), vyčkejte několik minut, dokud nebude pokožka zcela suchá.

Bezpečná manipulace s napájením.

Při použití dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl nadměrně napnutý ani mechanicky namáhaný.

Ochrana před slunečním zářením.

Bezprostředně po aplikaci se doporučuje vyhnout přímému slunečnímu záření a použít vhodnou ochranu (např. přípravek s SPF).

Reakce pokožky.

Pokud se během aplikace nebo po ní objeví výrazné podráždění, pálení či jiná nežádoucí reakce, přerušete používání přístroje.

METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

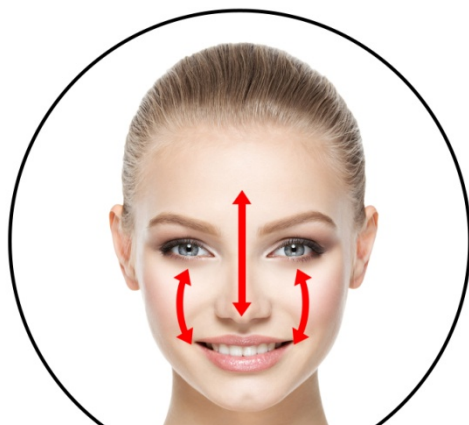

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU

Údržba přístroje je velmi důležitá zejména v případech, kdy je přístroj používán více osobami. Při údržbě přístroje věnujte pozornost v těchto bodech:

- Keramický povrch aplikační hlavice udržujte vždy čistý.
- Použijte nejlépe přípravek roztok s obsahem alkoholu.
- Přípravek nestříkejte přímo na hlavici. Naneste na hadřík a poté otřete povrch hlavice.
- Vždy povrch hlavici osušte druhým samostatným hadříkem do sucha.
- K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
- Žádná část aplikační hlavice není vodotěsná. Není určena k ponoření do vody.

INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA

V průběhu používání přístroje můžete narazit na situaci, kdy budete potřebovat poradit ohledně používání přístroje nebo technického problému. Neváhejte se na nás obrátit. Jsme vám plně k dispozici.



beautyrelax

   **PO - PÁ 11:00 - 18:00**
(420) 737 196 160

Facebook: facebook.com/BeautyRelaxEquipment/

OBRÁZKOVÁ GALERIE



























LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma **SANTADRIA s.r.o.**, IČO: 29195454, DIČ: CZ29195454, tímto informuje zákazníka, že výrobek je určen ke kosmetickým účelům v souladu s návodem k obsluze a **není zdravotnickým prostředkem** ani neslouží k diagnostice, prevenci nebo léčbě jakéhokoli onemocnění.

Prodávající odpovídá za vlastnosti výrobku v rozsahu stanoveném **platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky**, zejména za shodu výrobku s technickými a bezpečnostními požadavky v okamžiku jeho uvedení na trh.

Prodávající **nenese odpovědnost za škody nebo újmy**, které vzniknou v důsledku:

- používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bezpečnostními pokyny nebo určeným účelem použití,
- neodborného, nevhodného nebo nadměrného používání výrobku,
- používání výrobku osobami, u nichž je jeho použití podle návodu kontraindikováno,
- zásahů do výrobku, jeho úprav, oprav nebo manipulace provedených neoprávněnou osobou,
- používání výrobku v rozporu s platnými právními předpisy v zemi, kde je výrobek používán.

V případě **komerčního používání výrobku** bere zákazník na vědomí, že **odpovědnost za splnění veškerých požadavků vyplývajících z platné legislativy**, zejména v oblasti odborné způsobilosti obsluhy, licencí, povolení nebo jiných zákonných podmínek, **nese výhradně provozovatel** zařízení. Prodávající nenese odpovědnost za právní důsledky vyplývající z komerčního používání výrobku v rozporu s právními předpisy platnými v konkrétní jurisdikci.

Tato doložka **neomezuje ani nevylučuje práva zákazníka**, která mu náleží podle závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele, ani odpovědnost prodávajícího za vady výrobku či škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu, v jakém ji nelze podle práva vyloučit.

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj

PLASMAFORCE PROFESSIONAL STUDIO

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-3106**

EAN: **8594166124066**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2021 EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2024

EN 55014-2:2021 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2020 EN 61000-4-4:2012

EN 61000-4-11:2020 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Přístroj slouží ke kosmetické péči o pleť. Přístroj není zdravotnický prostředek.

Technologie přístroje slouží pro neinvazivní aplikaci na pleť. Žádná z částí aplikační hlavice není schopna narušit integritu pleti. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění.

V případě používání více osobami je třeba dbát zvýšenou pozornost s hygienickými normami pro přístroje obdobného typu. Určeno k profesionálnímu použití v kosmetickém salonu.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 1.2.2025