

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj **BeautyRelax BR-2300**

POREMAX ICAM ELEGANCE



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	5
MODRÉ SVĚTLO - REŽIM BLUE-RAY	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
OBSAH BALENÍ	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
SYSTÉM VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ	7
PROBLEMATIKA TVORBY ČERNÝCH TEČEK	8
PŮSOBNÍ VNĚJŠÍCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ	9
POPIS PŘÍSTROJE	10
NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	11
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	11
ROZLOŽENÍ VÝKONU VAKUOVÉHO SÁNÍ	11
POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ	11
VÝZNAM VYMĚNITELNÝCH APLIKÁTORŮ	12
INTENZIVNÍ A VYSOCE ŠETRNÉ NASÁVÁNÍ	13
VAKUOVÉ SÁNÍ 1-2-3	14
PÁROVÁNÍ PŘES WIFI PŘENOS	15
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	26
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	27
DOSAŽITELNÉ ÚČINKY ČIŠTĚNÍ PLETI	28
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	29
NABÍJENÍ BATERIE	29
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	30
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	30
CERTIFIKACE	30
DOVOZCE	30

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Silné kožní onemocnění v místě použití přístroje
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



HLAVNÍ VÝHODY

- Vytahuje černé tečky a nečistoty z kožních pórů
- Napomáhá zbavit pleti mastnoty
- Stimuluje kolagenní a elastická vlákna
- Zlepšuje prokrvení pleti
- Plet je svěžší, hladší a přirozeně zářivější
- Zvětšení obrazu pleti poskytuje cenné informace pro důkladnou diagnostiku jejího stavu

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

- Zabudovaná kamera
- 20násobné zvětšení
- Nasvícení pleti pomocí LED diod
- Přenos obrazu pomocí WiFi do vašeho telefonu nebo tabletu
- Možnost nastavení 5 úrovní výkonu vakuového nasávání
- 4 vyměnitelné aplikátory s různými tvary koncovky
- Používání je naprosto bezpečné a bezbolestné
- Šetrný k pokožce
- Vhodný pro všechny typy pleti
- Snadné ovládání pomocí tlačítek na těle přístroje
- Kompaktní, malý a lehký
- Bezdrátové používání díky nabíjecí baterii

MODRÉ SVĚTLO - režim BLUE-RAY

- aktivuje porphyryny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie)
- antibakteriální a protizánětlivý účinek
- prevence proti tvorbě akné
- bezpečné a efektivní ošetření

TECHNICKÉ PARAMETRY

- 5 úrovní výkonu vakuového nasávání
- 4 vyměnitelné aplikátory s různými tvary koncovky
- HD kamera s 20násobným zvětšením obrazu
- Přenos obrazu do telefonu nebo tabletu pomocí WiFi
- Požadavky na aplikaci pro zobrazení zvětšeného obrazu: Android 4.4, IOS 9.0, Windows vista/7/8/10
- Napájení: USB kabelem (součástí balení)
- Výkon: 3W
- Kapacita baterie: 1000mAh
- Rozměry: 15x8,5x5,3cm
- Hmotnost: 390g

OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2300 POREMAX ICAM ELEGANCE
- 4 vyměnitelné aplikátory
- Napájecí USB kabel
- Návod k obsluze

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Kosmetický přístroj BeautyRelax Poremax iCam Elegance s vestavěnou kamerou. Zvětšený obraz pleti na vašem telefonu nebo tabletu umožní velmi precizní čištění pleti v reálném čase. Díky 20násobnému zvětšení s LED nasvícením vám nyní neunikne žádný kožní pór! Možnost nastavení výkonu vakuového sání. Modré světlo fotonové terapie pro dosažení antibakteriálního pleťového účinku. 4 vyměnitelné aplikátory jsou součástí balení. WiFi konektivita.


SYSTÉM VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ



Naše pleť je každý den vystavena celé řadě faktorů, které mají negativní vliv (prach, smog, bakterie, zbylé částičky make-upu, vlhkost). Tvorba mazu v kombinaci s nečistotami a odumřelými kožními buňkami ucpe kožní póry a projeví se vznikem **černých teček** nebo **pupínků s bílými "čepičkami"**. Ideální prostředí pro vznik bakterií a následného zánětu. Hlavním předpokladem pro krásnou a zdravou pleť je pravidelná péče.


Kosmetický přístroj BeautyRelax Poremax iCam Elegance pleť důkladně vyčistí. V případě vzniku černých teček a pupínků napomáhá k jejich odstranění. Aplikční hlavice nasaje pokožku a hrana aplikátoru odstraní z povrchu nečistoty, **černé tečky a nevzhledné bílé čepičky**.

Nepříjemnému ručnímu vymačkávání, které způsobí výrazně zarudnutí a podráždění pleti je definitivní konec! Povrchové pigmentové skvrnky a póry se zjemňují. Kosmetický přístroj BeautyRelax Poremax iCam Elegance je vysoce účinný, ale zároveň šetrný k pleti!

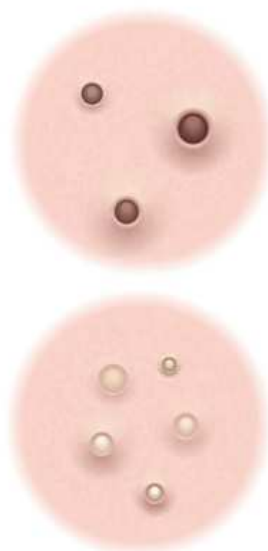


PROBLEMATIKA TVORBY ČERNÝCH TEČEK

Jednou z hlavních příčin vzniku černých teček je ucpání kožních pórů mazem nebo odumřelou pokožkou. Černá barva hlavičky ucpaného póru není nečistota. Jde o výsledek oxidace po vystavení mazu a odumřelých kožních buněk okolnímu prostředí. Kosmetický přístroj s vakuovým sáním patří mezi nejúčinnější metodu odstranění černých teček při co nejmenším podráždění pleti.

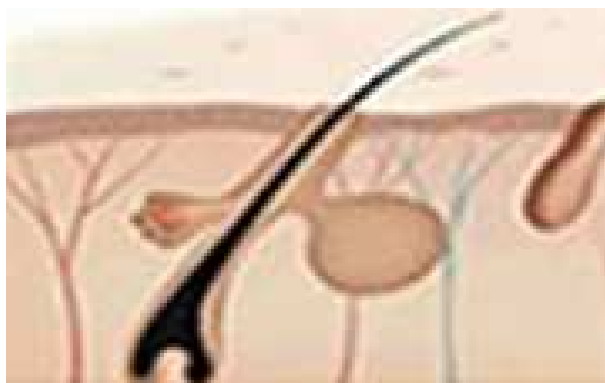


Mastnota z mazových žláz je uvolněna podél vlasových folikulů.

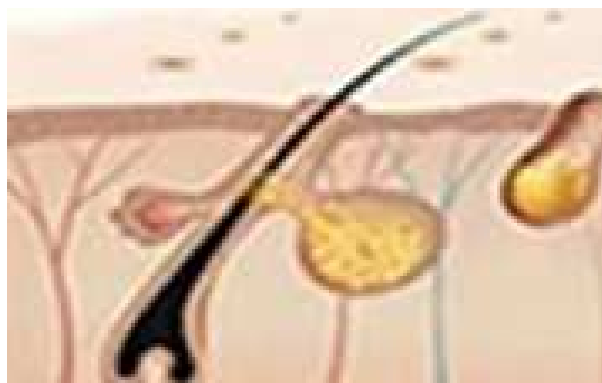

Mazové žlázy uvolňují větší či menší množství mastnoty dle různých faktorů.



Mastnota zbělá.

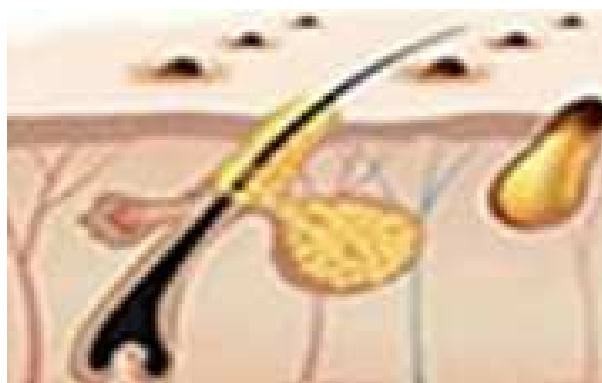

Mastnota je exponována a oxiduje ve vzduchu při vzniku velkého množství černých teček.

PŮSOBNÍ VNĚJŠÍCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ

Naše pleť je vystavena celou řadu vnějších faktorů, které různou měrou ovlivňují kvalitu a rychlost stárnutí naší pleti. Slunce, prach, málo spánku, nesprávná životospráva, nedostatečné pravidelné vyčištění pleti od makeupu.



Zvětšené póry, zvýšený výskyt černých teček, neefektivní péče o pleť



Zvýšený výskyt bakterií, zvýšená citlivost pleti, větší náchylnost k tvorbě akné




Zvýšená produkce mazu, mastná pleť, která se velmi špatně čistí



Ucpané póry nečistotami ze zbytků make-upu se sníženým účinkem čištění pleti

POPIS PŘÍSTROJE

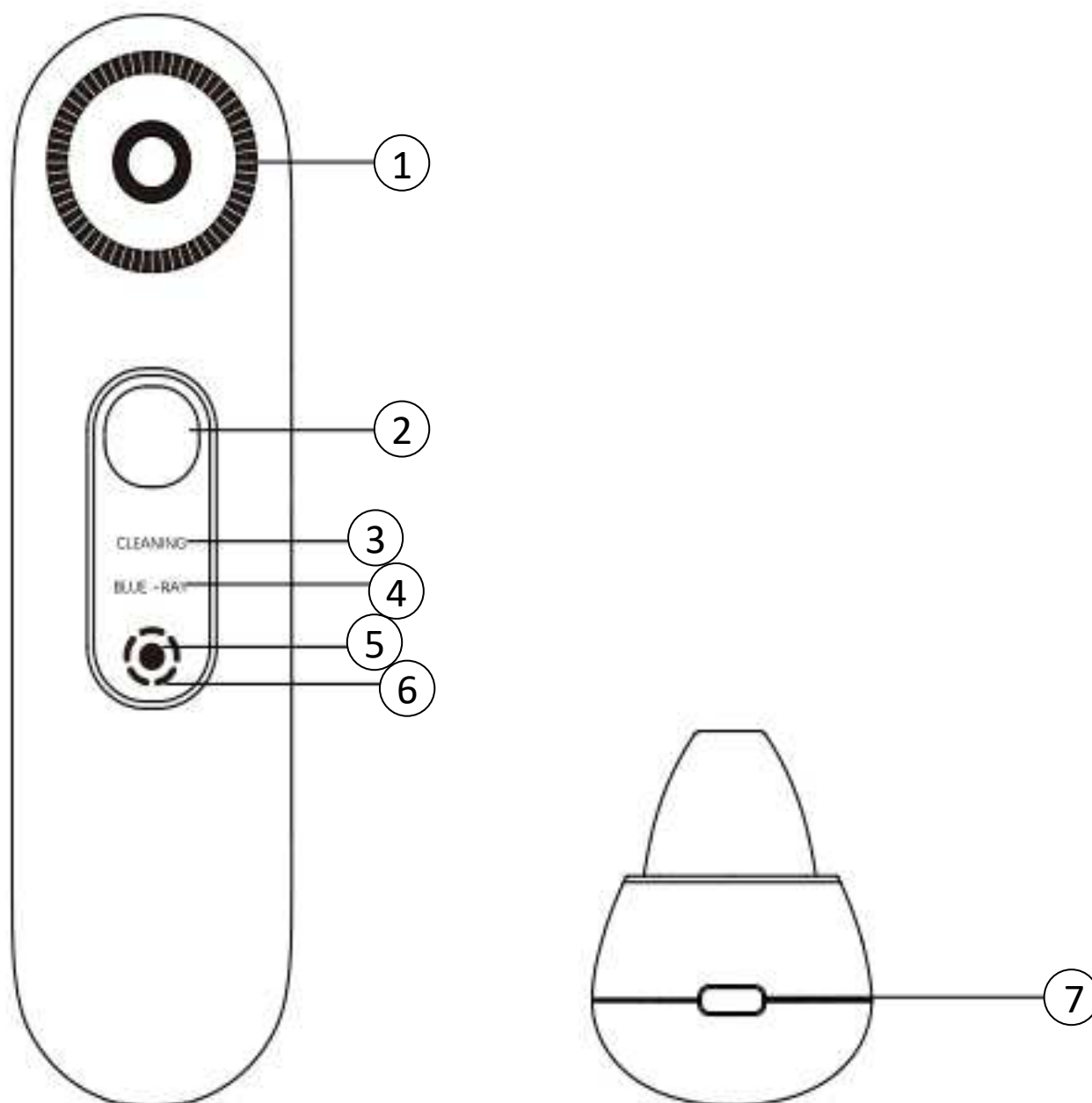

1. Modré LED světlo fotonové terapie
2. Tlačítko **ON/OFF**
3. Indikace režimu **CLEANING**
4. Indikace režimu **BLUE-RAY**
5. Indikace provozu přístroje
6. Indikace výkonu vakuového sání
7. Vstup pro nabíjecí kabel

NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Než přistoupíte k samotnému ošetření pleti přístrojem, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Vyčkejte, až pleť zcela uschne. Na pleti se před použitím nesmí vyskytovat stopy vlhkosti. Před prvním použitím přístroje si vyzkoušejte jeho aplikaci např. na předloktí. Vyčkejte přibližně 1 hodinu, zda při použití vakuového sání nebude pokožka negativně reagovat.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Přístroj nepoužívejte na silně zjizvenou pokožku.
- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte ekzémy nebo jiným kožním onemocněním.
- Pokud máte citlivou pleť, používejte přístroj se zvýšenou opatrností.
- Netlačte aplikační hlavici příliš velkou silou na pleť.
- Po ošetření může být pokožka mírně začervenalá. Jedná se o dočasný efekt, který by měl zmizet během několika desítek minut.
- Po ošetření je doporučeno používat vyživující masku, krém nebo noční krém. Ujistěte se, že používáte krém proti slunci, než vyjdete ven (v případě silného slunečního svitu).
- Po ošetření obličeje můžete po zklidnění pleti téměř ihned aplikovat make-up podle potřeby.

ROZLOŽENÍ VÝKONU VAKUOVÉHO SÁNÍ


Sílu vakuového sání si můžete nastavit individuálně podle vaší potřeby. V případě, že máte velmi citlivou pleť a znečištění není výrazné, použijte nižší výkon. Pokud je vaše pleť odolná a silně znečištěná, využijte vyššího výkonu. Pravidelným používáním si nastavení výkonu velmi rychle osvojíte. Vždy se snažte zvolit vhodný kompromis výkonu, aby bylo ošetření účinné, ale zároveň pro vás komfortní. Počítejte s tím, že při vyšším výkonu bude pleť více podrážděná a zarudlá. Bude tak potřebovat delší čas na rekonvalescenci.

POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ

Každý máme jinou velikost obličeje, tvar a jinak citlivou pleť. Rozdílů jsou také v aktuální kondici pleti. Každý z nás je originál. Součástí balení jsou 4 různé aplikátory, aby bylo použití kosmetického přístroje co nejvíce univerzální. Instrukce k jednotlivým aplikátorům jsou pouze obecné. V praxi si můžete sami vyzkoušet, která kombinace aplikátorů je pro vás nejvhodnější. Může se stát, že z dlouhodobého časového horizontu některé vůbec nevyužijete.

Aplikátory jsou zakončeny otvorem různého průměru. Čím je otvor menší, tím prochází podtlak menším prostorem. V praxi to znamená, že menší otvor koncentruje na menší ploše větší tah podtlaku. Výkon vakuového sání si tak můžete upravit nejen pomocí tlačítka na přístroji, ale také vhodnou volbou aplikátoru. Aplikátory s různým průměrem otvoru používejte na vytahování černých teček, podporu lokálního krevního oběhu obličeje nebo masážní lifting jemných mimických vrásek.

VÝZNAM VYMĚNITELNÝCH APLIKÁTORŮ

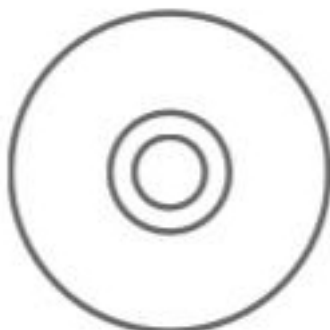

Aplikátor s malým otvorem

Přes malý otvor se koncentruje zvýšená úroveň podtlaku. Ideální pro použití na místech, kde jsou kožní póry více ucpané a hůře odstranitelné.



Aplikátor s eliptickým otvorem

Optimální pro rty, nos a zejména záhyby nosu. Lze použít na čištění pleti. Skvělé pro eliminaci jemných mimických vrásek.



Aplikátor se středním otvorem


Optimální pro rty, nos a zejména záhyby nosu. Lze použít na čištění pleti. Skvělé pro eliminaci jemných mimických vrásek.



Aplikátor s velkým průměrem kruhové koncovky

Vhodné pro čelo nebo nos. Ideální pro použití na vytažení černých teček. Můžete použít na ošetření obličeje nebo dekoltu.

INTENZIVNÍ A VYSOCE ŠETRNÉ NASÁVÁNÍ

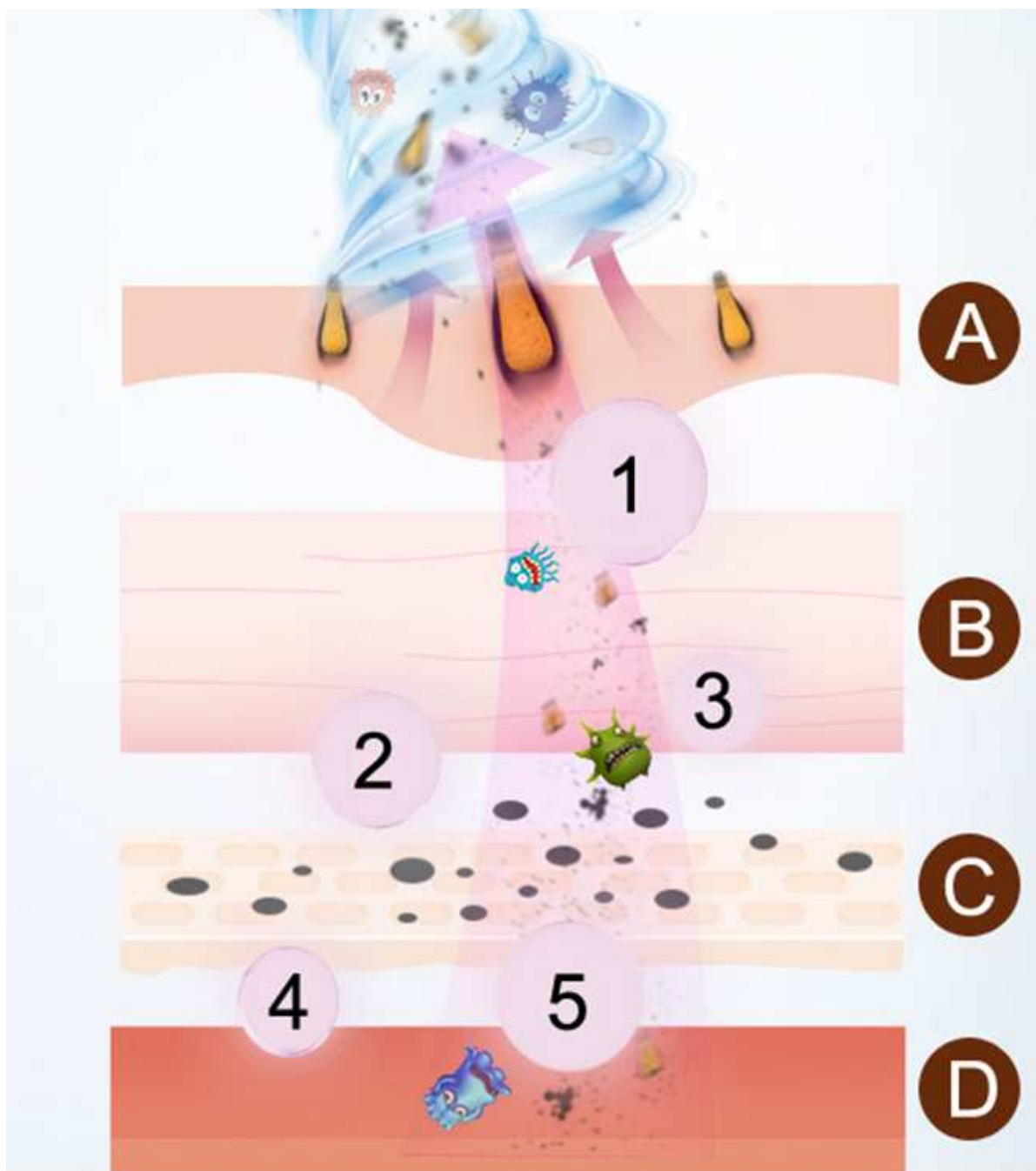

(1) černé tečky

(2) odumřelá kožní rezidua

(3) zbytky make-upu

(4) mastnota

(5) bakterie


(A) povrch pokožky

(B) zrohovatělá vrstva

(C) bazální vrstva

(D) dermis vrstva

VAKUOVÉ SÁNÍ 1-2-3

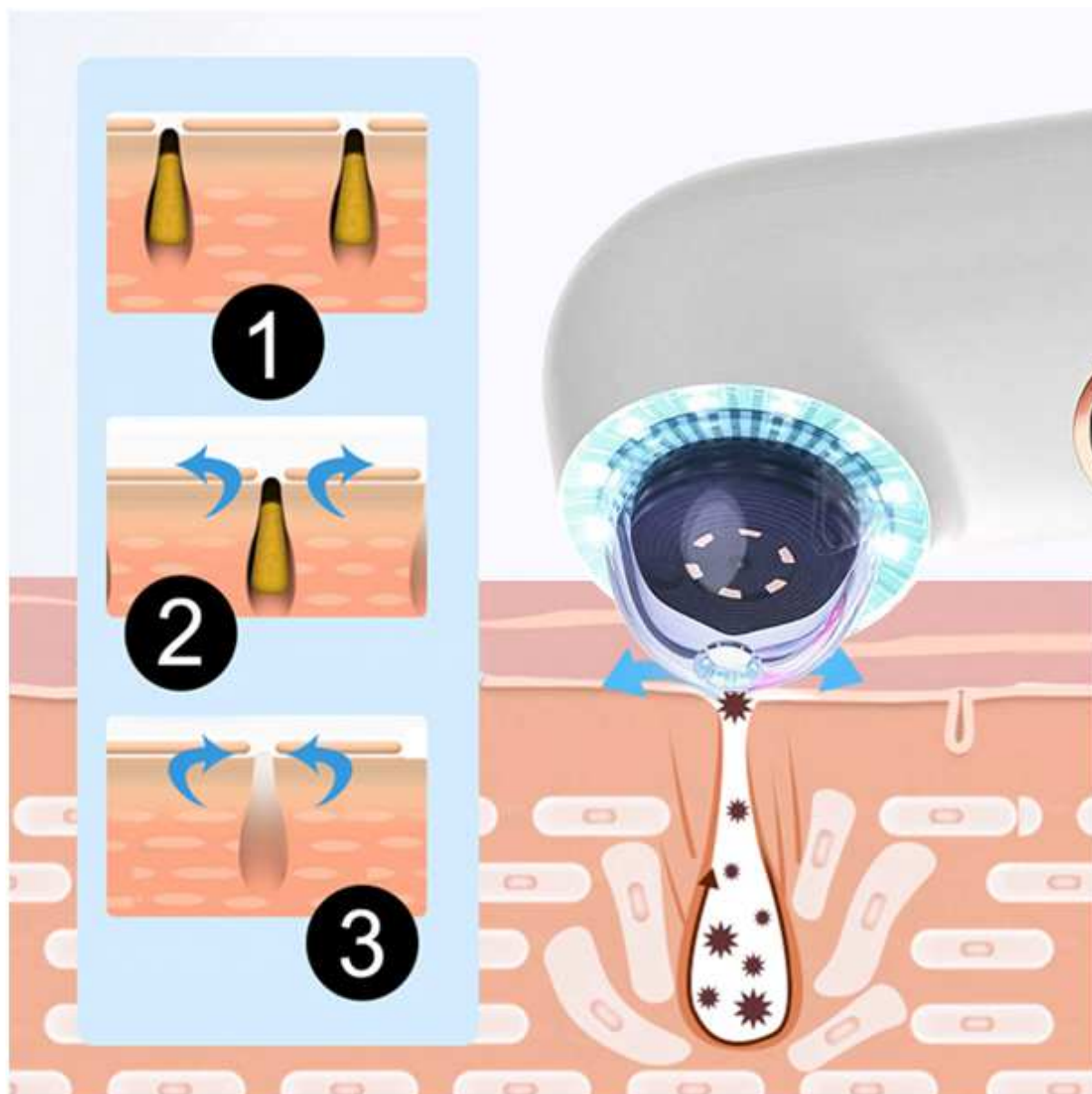


1. **OTEVŘENÍ:** otevření pórů, černé tečky.
2. **SÁNÍ:** vysávejte černé tečky a akné.
3. **SMRŠTĚNÍ:** zmenšuje póry a zklidňuje pokožku.

PÁROVÁNÍ PŘES WIFI PŘENOS


1. Na vašem chytrém telefonu nebo tabletu si nainstalujte aplikaci **UDU**
2. Aplikaci **UDU** naleznete v **Google Play** nebo **AppStore**. Do pole vyhledávání aplikace zadejte název „udu“.




3. Zvolte možnost „Instalovat“.

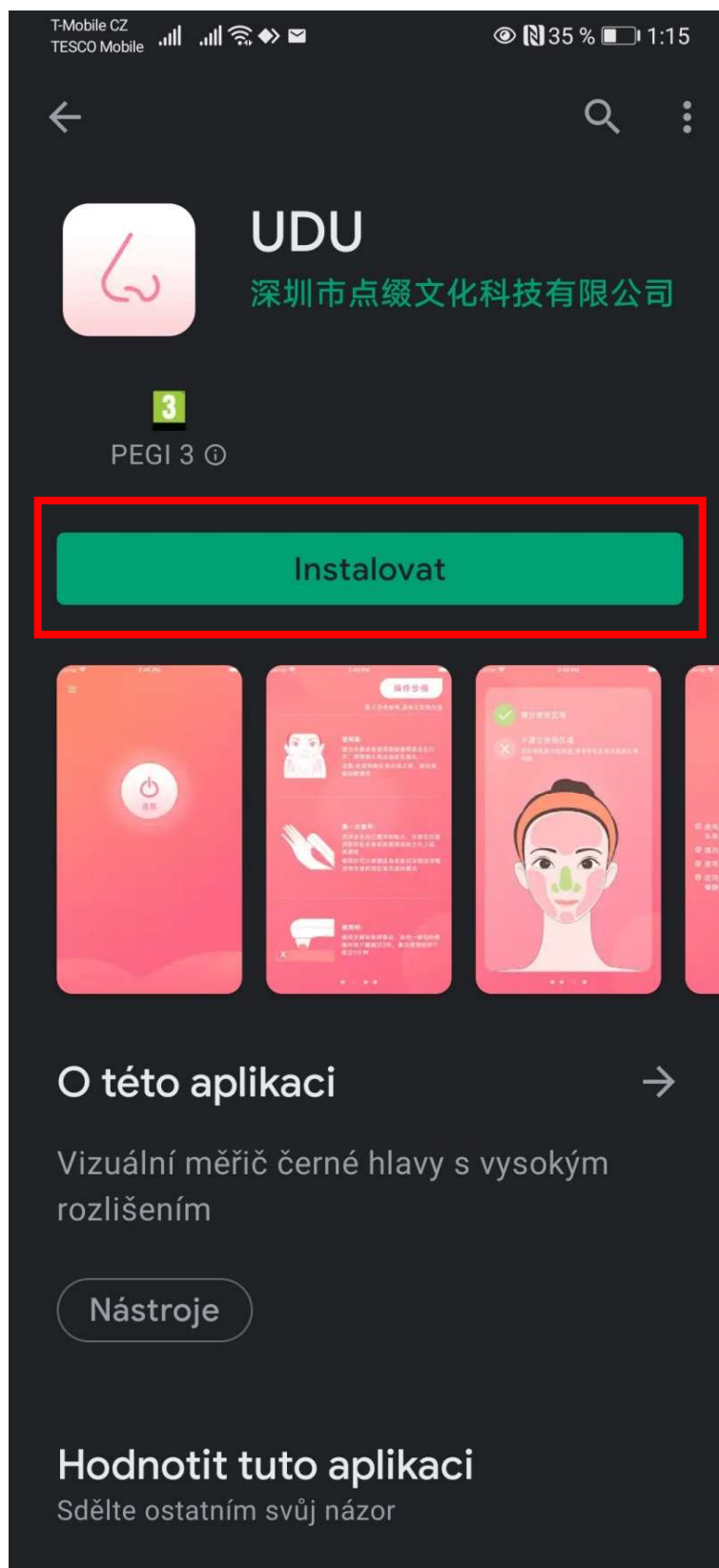


4. Jakmile je instalace aplikace dokončena, je třeba spárovat váš chytrý telefon nebo tablet přes Wifi konektivitu.
5. Stiskněte na kosmetickém přístroji dlouze tlačítko **ON/OFF**. Symbol baterie se rozsvítí. Nyní je kosmetický přístroj připraven na spárování.
6. Ve Wifi nastavení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu se vám kosmetický přístroj zobrazí jako „UDU Beauty-c882“.

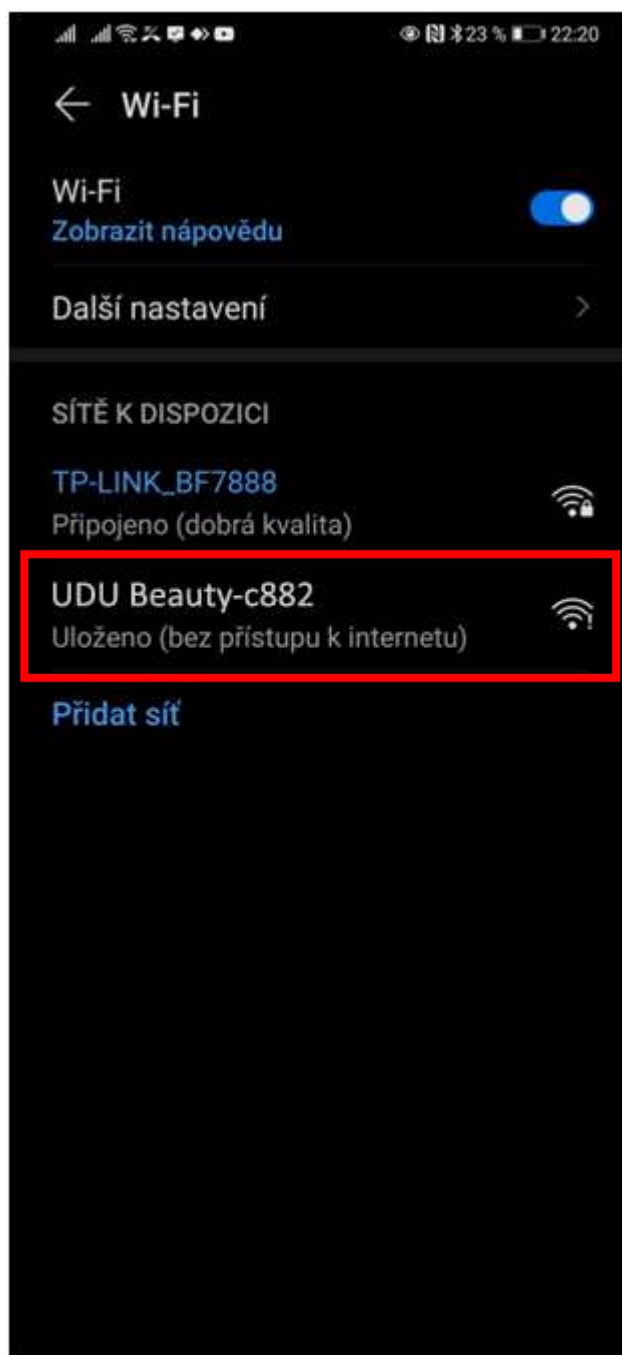

7. Pro výběr zařízení zvolte „**PŘIPOJIT**“. Pro dokončení procesu spárování není třeba zadávat heslo.

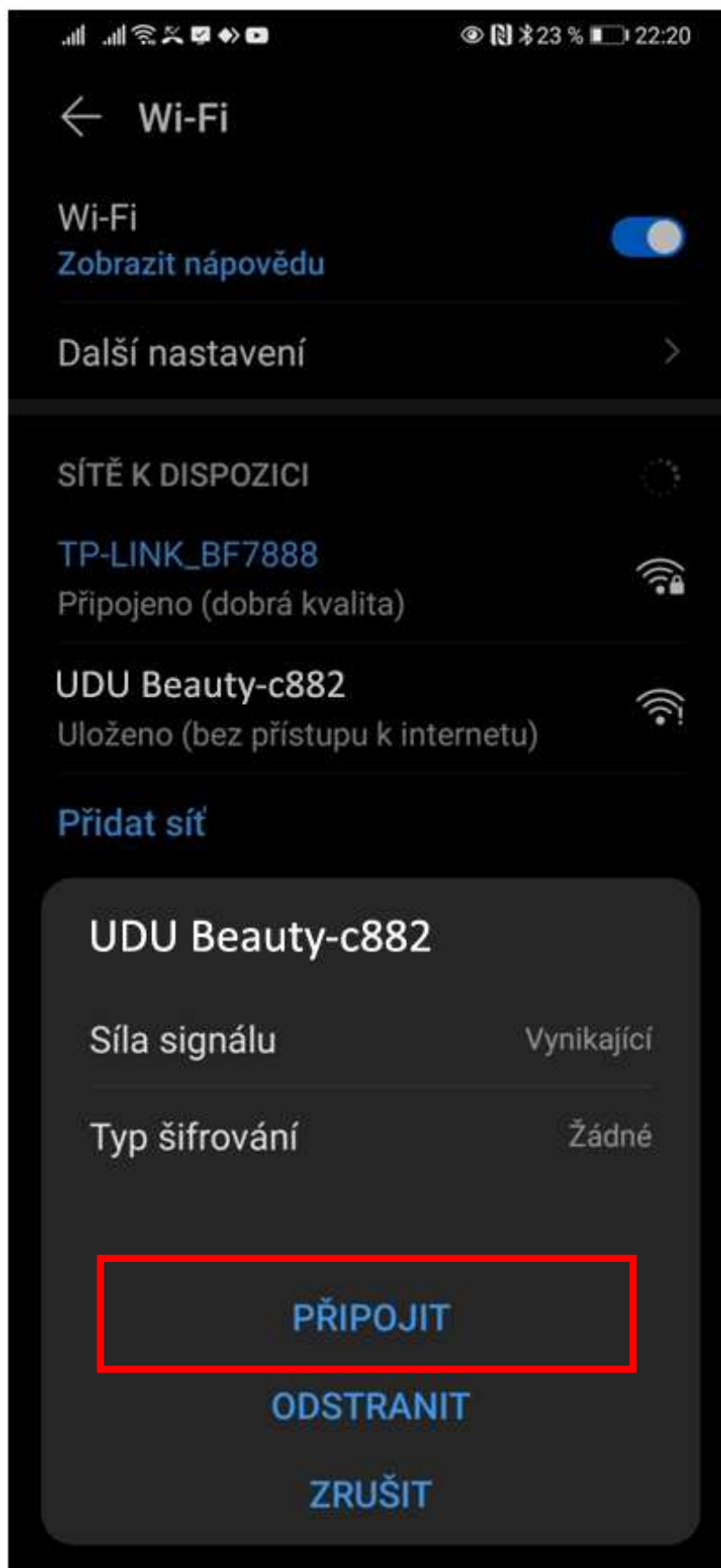


8. Úspěšné spárování je potvrzeno notifikací **PŘIPOJENO**.

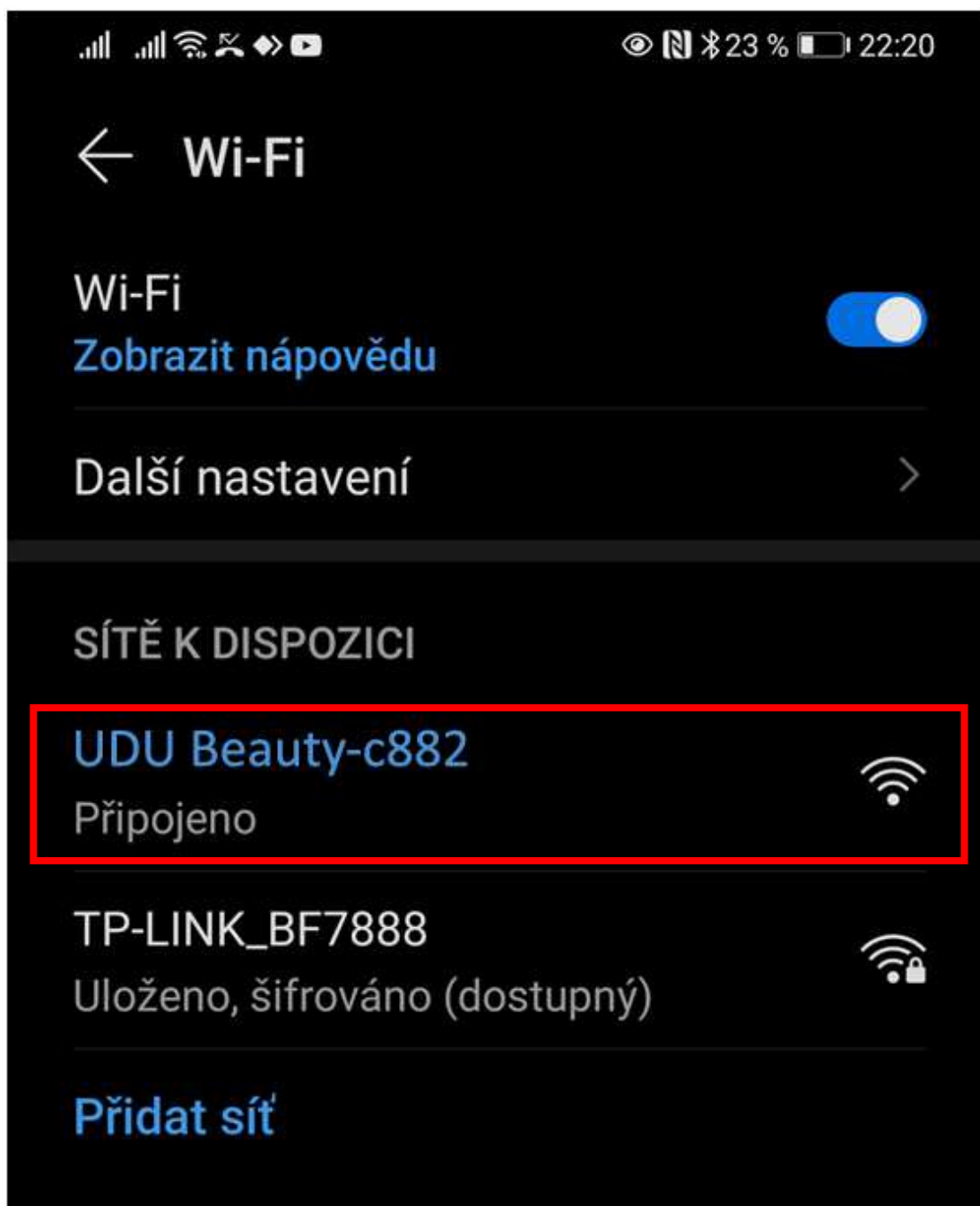



9. Jakmile je proces spárování úspěšně dokončen a otevřete aplikaci **UDO**, aktivují se LED světla aplikační hlavice. **Upozornění:** kamera kosmetického přístroje je přesně zaostřena na vzdálenost při nasazené aplikační hlavici. Pokud Aplikační hlavici nenasadíte a přístroj přitisknete k pleti, obraz bude rozostřen.

10. V aplikaci **UDO** postupně přejděte při prvním spuštění přes následující informace:

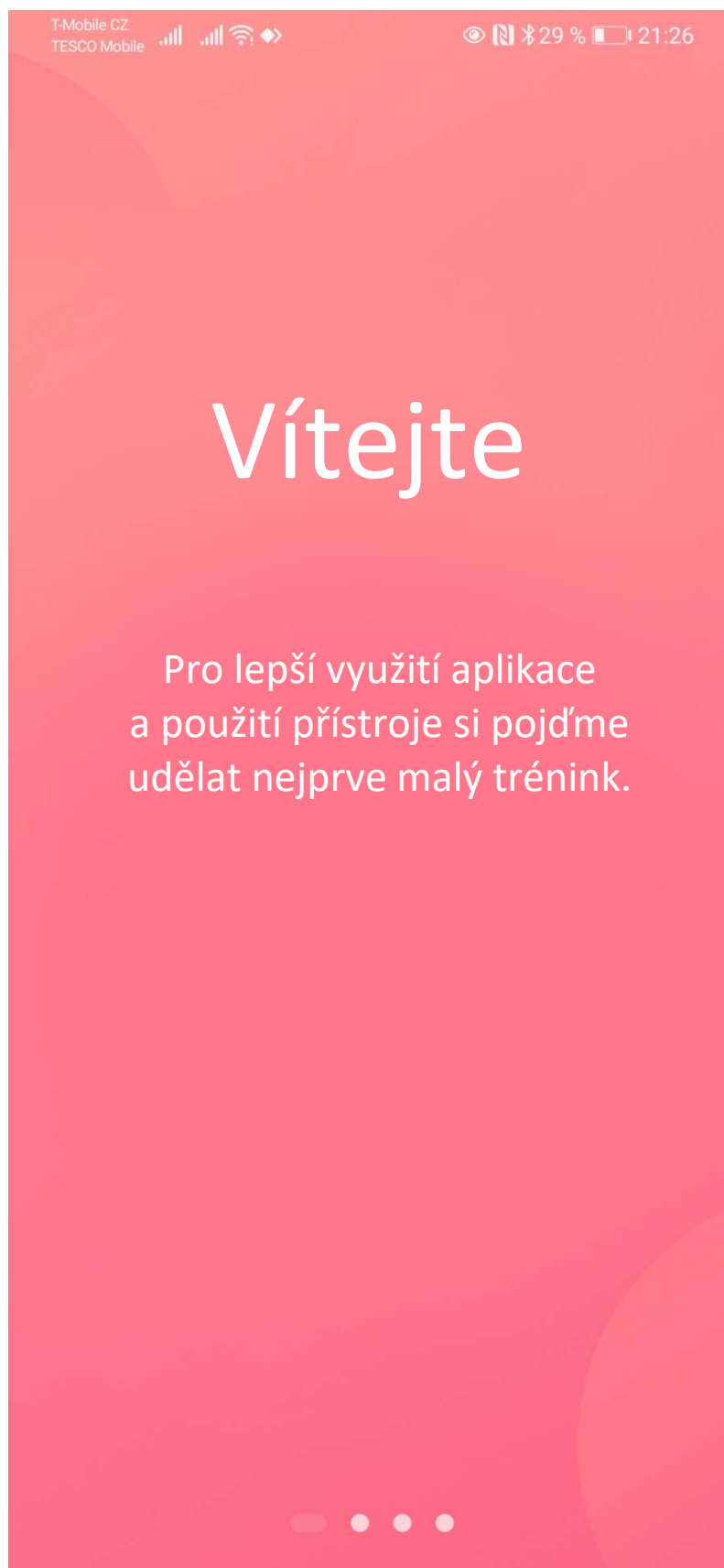




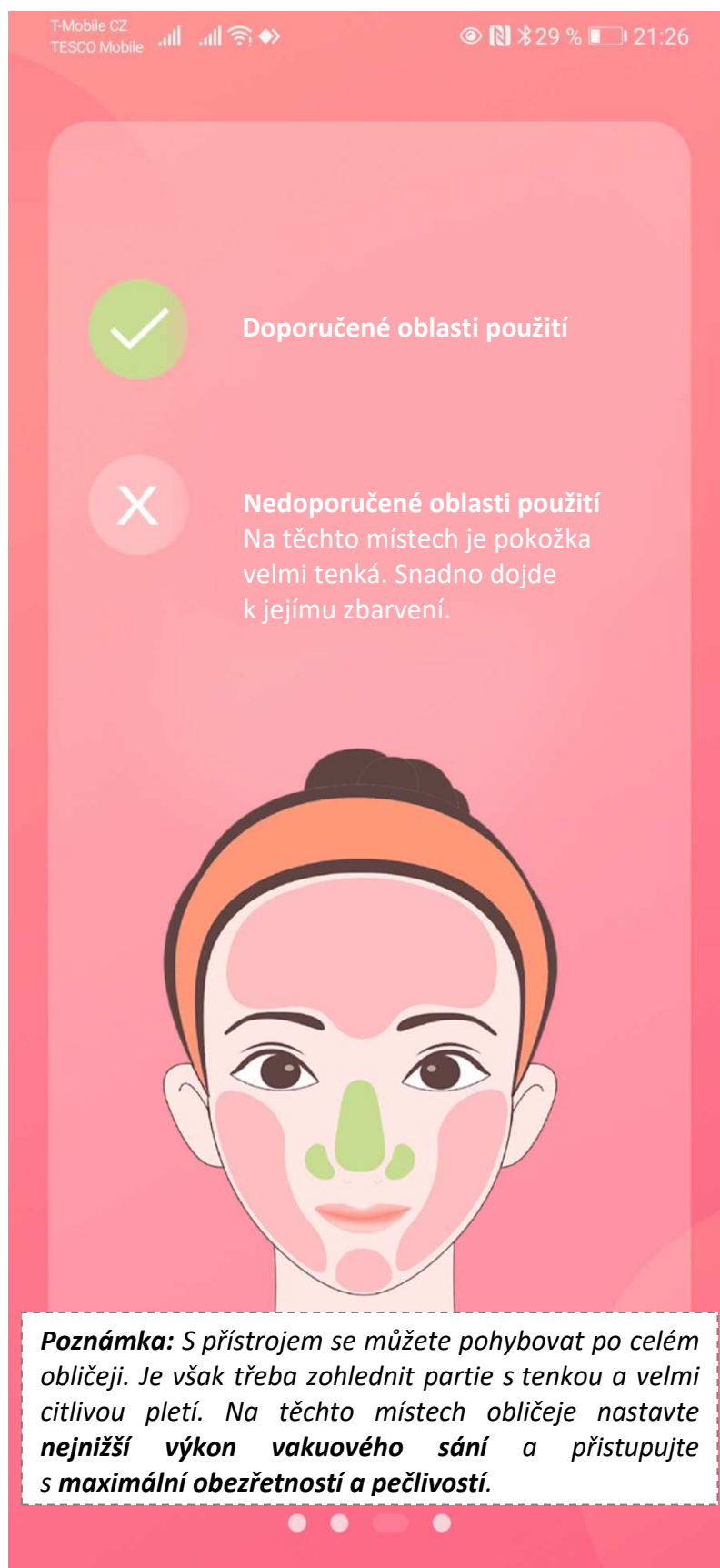

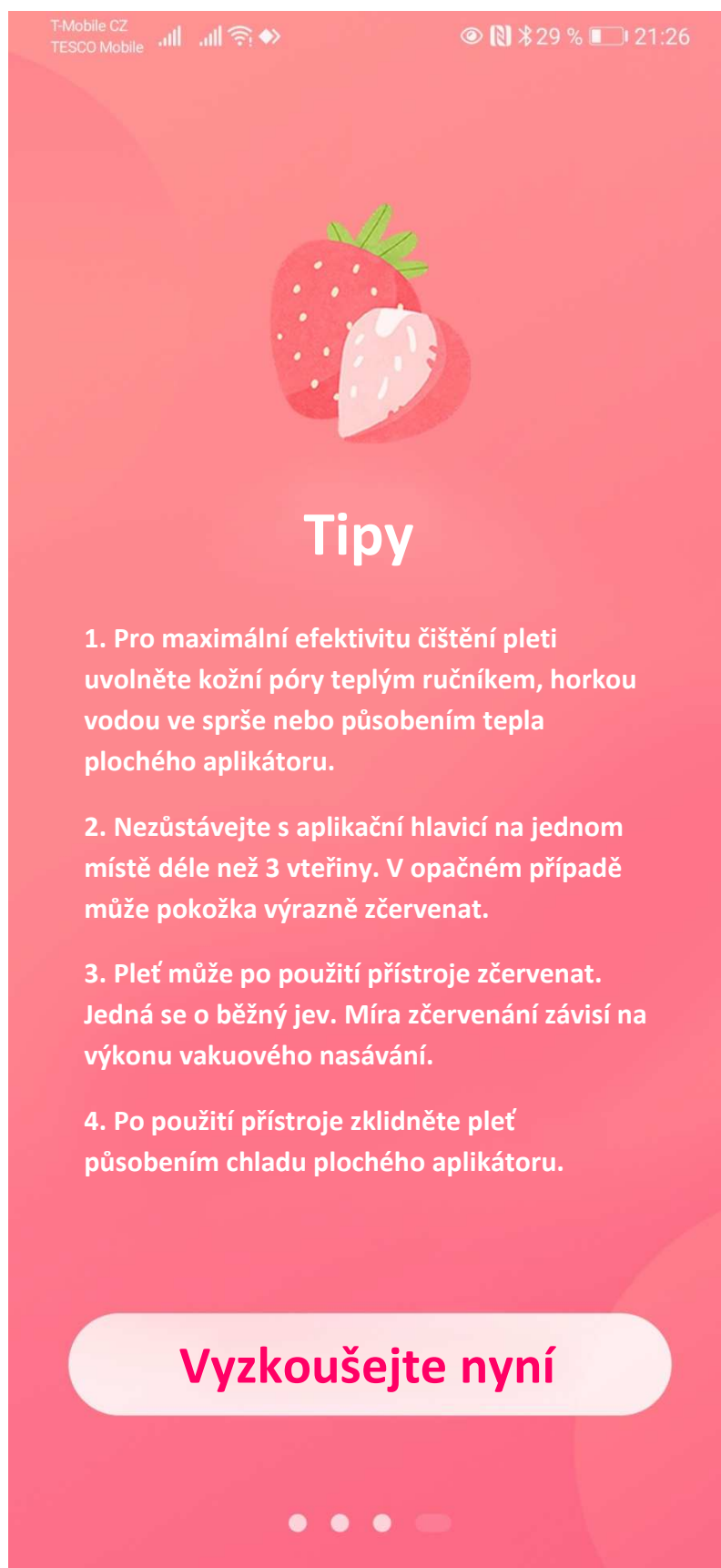

11. Přenos obrazu zahájíte volbou tlačítka „Turn on“.

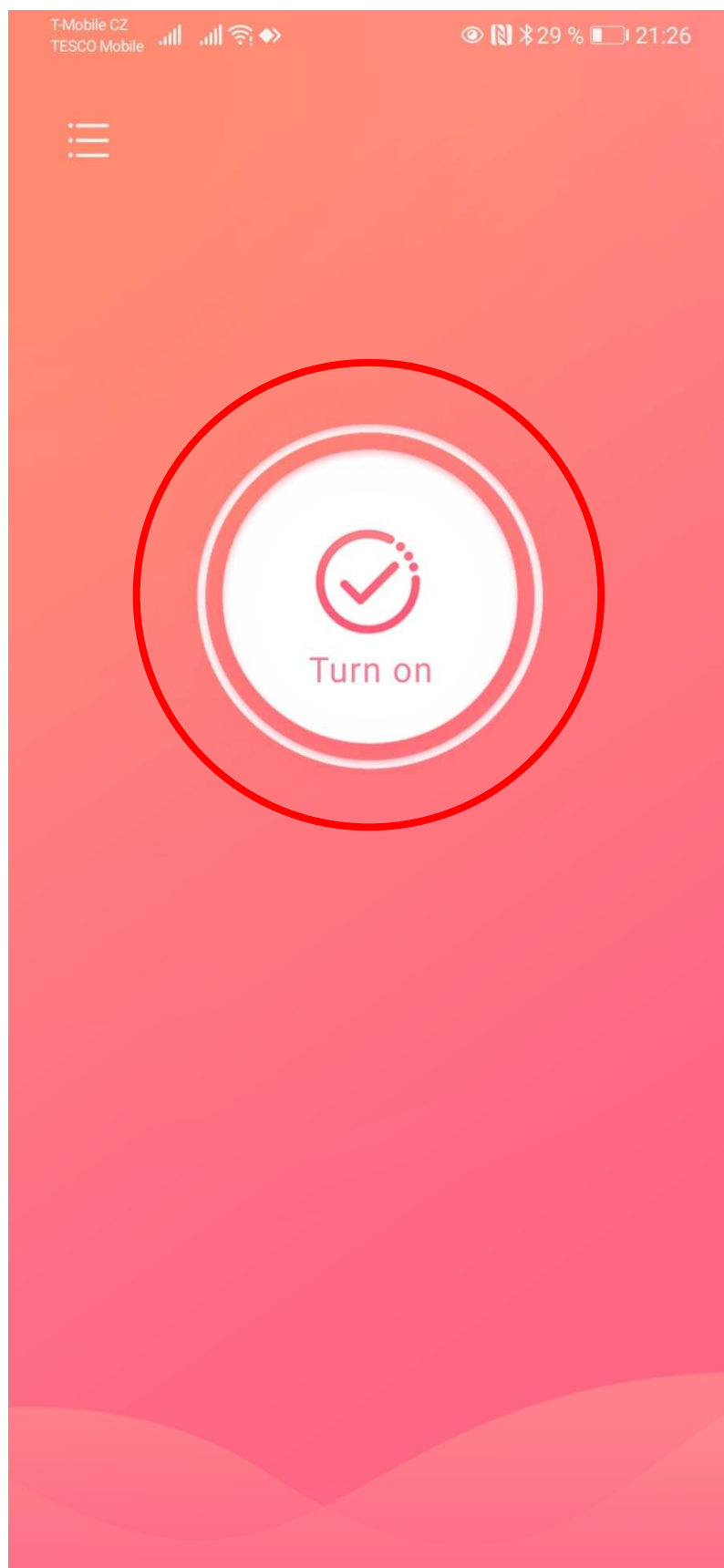

12. Průběh přenosu obrazu v reálném čase.



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
2. Jakmile svítí nápis **CLEANING**, je třeba ve Wifi nastavení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu potvrdit uživatele „UDU Beauty-c882“.
3. Vyčkejte, jakmile se zobrazí ve Wifi nastavení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu informace - **Připojeno**. Připojení nevyžaduje zadání hesla.
4. Otevřete aplikaci **UDU**. V oblasti aplikační hlavice se rozsvítí LED diody. Přístroj se nachází v pohotovostním režimu. Na panelu svítí nápis: **CLEANING**.
5. Pomocí krátkého stisku tlačítka **ON/OFF** si můžete nastavit výkon nasávání. K dispozici je celkem 5 úrovní výkonu. Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** si můžete nastavit výkon podtlaku v následujícím pořadí: **nejnižší – nízký – střední – vysoký – nejvyšší – vypnuto**. Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** se opakuje tento cyklus nastavení.
6. Rychlým stiskem 2x tlačítka **ON/OFF** aktivujete režim **BLUE-RAY**. V tomto režimu můžete odstranit aplikační hlavici. Pohybujte se po pleti tak, aby byla postupně pokryta celá plocha obličeje/krku. Při pohybu může být hlavice v kontaktu s pletí. Působení modrého světla má výrazný antibakteriální účinek. V režimu **BLUE-RAY** není třeba používat žádné ochranné pomůcky zraku. Je vhodné vyhnout se přímému pohledu do zdroje světla. Doporučujeme provést v závěru ošetření pleti. Dalším rychlým stiskem 2x tlačítka **ON/OFF** přepnete přístroj zpět do režimu **CLEANING**.
7. Aplikační hlavici pohybujte ve směrech - viz. sekce "**METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU**". Aplikátorem se pohybujte po pleti pomalu se zvýšenou pečlivostí. Nikdy nezůstávejte na jednom místě déle než tři sekundy. Druhou rukou si můžete napomáhat tím, že budete pokožku jemně napínat. Pohyb hlavice bude po povrchu pokožky co nejhladší.
8. Pro uložení obrázku nebo záznam videa můžete použít tlačítko **fotoaparát/kamera** na vašem chytrém telefonu nebo tabletu v programu UDI.
9. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

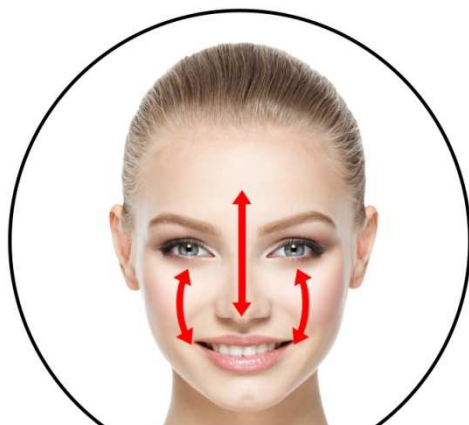


T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

DOSAŽITELNÉ ÚČINKY ČIŠTĚNÍ PLETI

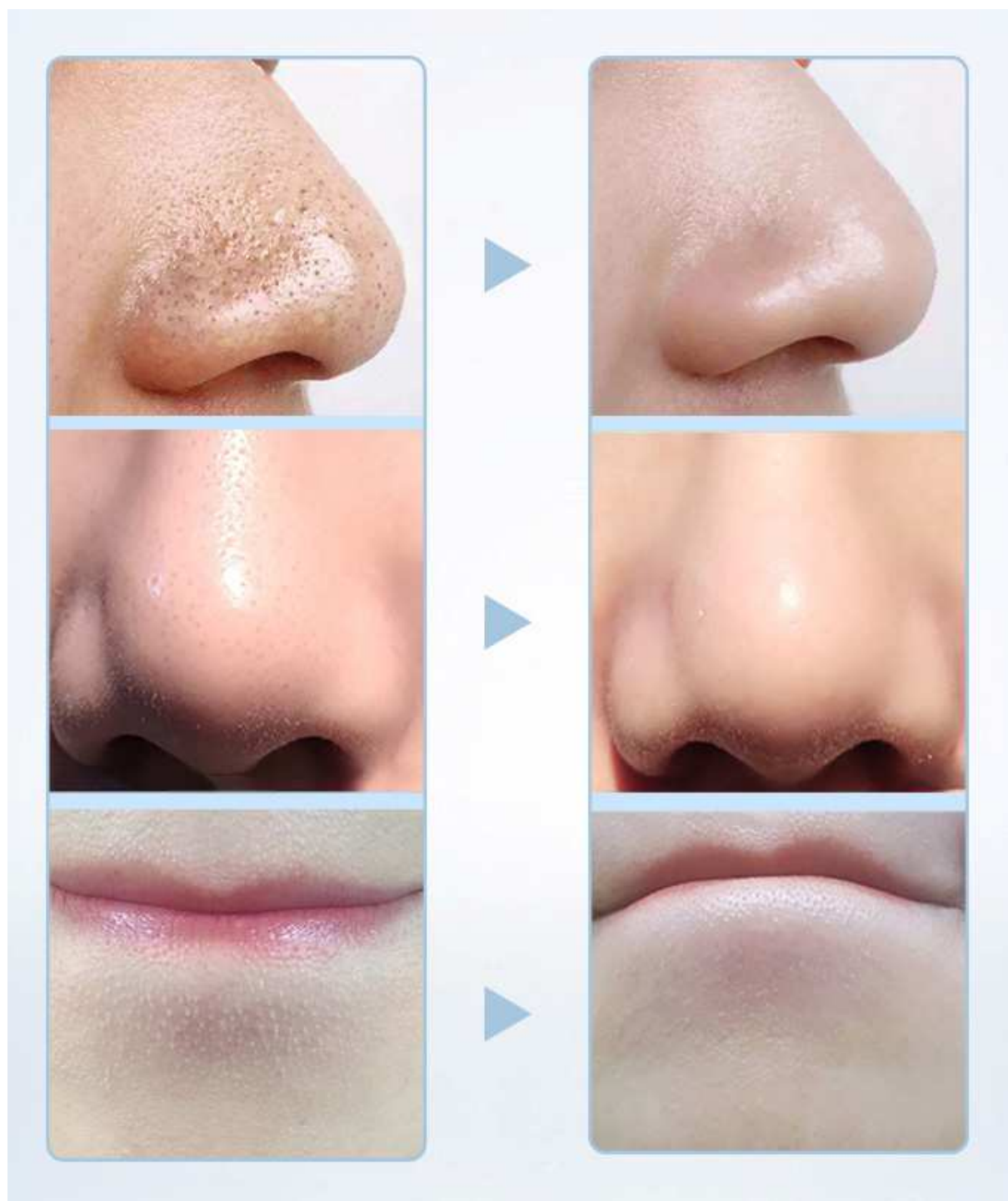

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jaká je optimální délka individuálního ošetření pleti?

Pro čištění pleti by se optimální délka měla pohybovat v rozsahu od 15 do 30 minut. Záleží, jak pečlivě se budete věnovat všem částem obličeje, popřípadě podbradku či dekoltu. Začínáte s kratší dobou ošetření a postupně prodlužujete podle toho, jak bude vaše pleť na přístroj reagovat. Ne vždy platí čím déle tím lépe. Pokud máte citlivější pleť, začínáte s kratší délkou ošetření. Při dalším použití přístroje můžete délku ošetření postupně prodlužovat.

Představuje ošetření pleti následné omezení?

Po dokončení čištění pleti může pokožka mírně zarudnout. Jedná se o naprosto přirozený efekt. Podpoří se krevní oběh a lymfatický systém obličeje. Zbarvení by mělo opadnout v řádech desítek minut. Pokožka se dostane zpět do normálu.

Je používání přístroje bolestivé?

Přestože je čištění založeno na principu odsávání svrchní vrstvičky odumřelé pokožky, nebudete cítit žádné nepříjemné pocity. Díky vakuovému sání budete čištění pleti vnímat jako příjemnou uvolňující masáž. Pokud máte velmi citlivou pleť, nastavte si menší výkon vakuového nasávání. Výkon si upravujte pocitově podle toho, jak bude vaše pleť reagovat.

Proč někdy bývá tento způsob ošetření pleti nazýván jako rejuvenace?

Rejuvenace nastartuje růst nových, zdravých a elastických kožních buněk, odolných vůči vnějším vlivům. Vráť tak biologický čas pokožky zpět a zpomalí její další stárnutí.

Je přístroj vhodný i pro moji pleť?

Čištění je vhodné pro všechny typy pleti. Omezení se vztahuje pouze na případy, kdy je pleť zasažena výrazným kožním onemocněním. Zvýšenou pozornost při používání musí dbát osoby, které mají na dotyk vysoce citlivou tenkou pleť. Důležitou úlohu hraje také reliéf pleti. Pokud se na vaší pleti vyskytuje větší počet jizviček nebo nestandardních nerovností (bradavice, kožní výrůstky), ošetření to může komplikovat. Je doporučeno se těmto místům aplikátorem vyhnout.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí kabel, který je součástí balení.

Upozornění: Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

Postup nabíjení:

1. Jeden konec kabelu zapojte do vstupu pro napájení přístroje.
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Průběh nabíjení indikuje blikající světelná signalizace.
4. Jakmile je baterie plně nabita, blikání symbolu baterie ustane.
5. Napájecí kabel odpojte od přístroje.
6. Délka nabíjení se odvíjí od aktuální kondice baterie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním aplikátoru jej odpojte od přístroje. Samotný aplikátor můžete omýt pomocí proudu vlažné vody. Pro čištění úzkých prostor aplikátoru je ideální použít vatovou tyčinku pro čištění uší. K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátorů nebo přístroje žádné ostré předměty, které by je mohly poškodit.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160