

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj na čištění pleti
BeautyRelax **BR-2190**

POREMAX OXYGEN



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
OBSAH BALENÍ	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
ČISTOU PLETÍ KE ZDRAVÍ A KRÁSE	7
SYSTÉM VODNÍ CÍRKULACE	7
SYSTÉM VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ	8
PROBLEMATIKA TVORBY ČERNÝCH TEČEK	9
PŮSOBNÍ VNĚJŠÍCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ	10
POPIS PŘÍSTROJE	11
NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	13
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	13
INTENZIVNÍ A VYSOCE ŠETRNÉ NASÁVÁNÍ	14
VAKUOVÉ SÁNÍ 1-2-3	15
ROZLOŽENÍ VÝKONU VAKUOVÉHO SÁNÍ	16
POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ	16
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	17
DŮLEŽITÉ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ	18
POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE	19
DOSAŽITELNÉ ÚČINKY ČIŠTĚNÍ PLETI	21
METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU	22
NABÍJENÍ BATERIE	25
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	25
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	25
CERTIFIKACE	25
DOVOZCE	25
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	26

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Přístroj není určen při použití v těchto případech:

- aktivním akné (zanícené, bolestivé pupínky) – vakuum by pokožku podráždilo
- rosacee (růžovka)
- kuperóze (rozšířené žilky)
- lupénce
- otevřených ranách, oděrkách, popáleninách
- čerstvých jizvách (méně než 6–8 týdnů)
- oparu v aktivní fázi
- po dermatologických nebo estetických zákrocích (chemický peeling, laser, microneedling, botox, výplně – minimálně 2–4 týdny)

HLAVNÍ VÝHODY

- Vysoce účinné mechanické čištění pleti
- Přístroj dodá okamžitě vaši pleti potřebnou vláhu
- Neinvazivní aplikace (přístroj neproniká přímo skrz pokožku)
- Aplikace bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Ihned po proceduře lze použít kosmetické přípravky
- Zlepšení prokrvení pleti
- Pleť působí hladkým a svěžím dojmem

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

- Vysoce účinné mechanické čištění pleti.
- Zlepšení prokrvení pleti.
- Pleť působí hladkým a svěžím dojmem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Nádržka na čistou a použitou tekutinu
- 3 úrovně nastavení intenzity vakuového sání
- 6 vyměnitelných aplikátorů pro aplikaci na pleti
- Indikace stavu baterie
- Napětí: 5V
- Výkon: 0,8W
- Napájení: USB kabel + síťový adaptér (součástí balení)
- Rozměry: výška 20x4x4,5cm
- Hmotnost: 290g

OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj POREMAX OXYGEN
- 6 vyměnitelných aplikátorů
- USB nabíjecí kabel + síťový adaptér 220V
- Návod k obsluze

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Poremax Oxygen představuje inovativní řešení z kategorie kosmetických přístrojů pro čištění pleti vakuovým sáním. Pracuje na principu vodní cirkulace. Přečerpávání tekutiny z jedné nádržky do druhé. Tekutina okamžitě hydratuje pleť a zbytek na sebe naváže nečistoty, bakterie a kožní rezidua. Nasátá tekutina z pleti putuje přímo do odpadní nádoby. Výsledkem je čistá, hladká a bohatě hydratovaná pleť. Vyzkoušejte nové skutečně funkční kosmetické použití na pleti ještě dnes!

ČISTOU PLETÍ KE ZDRAVÍ A KRÁSE

Naše pleť je každý den vystavena celé řadě faktorů, které na ni mají negativní vliv (prach, smog, bakterie, zbylé částičky make-upu, vlhkost). Tvorba mazu v kombinaci s nečistotami a odumřelými kožními buňkami ucpe kožní póry a projeví se vznikem černých teček nebo pupínků s bílými "čepičkami". Ideální prostředí pro vznik bakterií a následných zánětů. Hlavním předpokladem pro krásnou a zdravou pleť je pravidelná péče!

SYSTÉM VODNÍ CIRKULACE

Aplikační hlavice je speciálně navržena tak, aby pravidelně dávkovala tekutinu. Přečerpávání tekutiny z jedné nádržky do druhé. Tekutina okamžitě hydratuje pleť a zbytek na sebe naváže nečistoty, bakterie a kožní rezidua. Nasátá tekutina z pleti putuje do odpadní nádoby. Při plném kontaktu aplikátoru s pletí nedochází k nežádoucímu ztékání tekutiny.




SYSTÉM VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ




Naše pleť je každý den vystavena celé řadě faktorů, které mají negativní vliv (prach, smog, bakterie, zbylé částičky make-upu, vlhkost). Tvorba mazu v kombinaci s nečistotami a odumřelými kožními buňkami ucpe kožní póry a projeví se vznikem **černých teček** nebo **pupínků s bílými "čepičkami"**. Ideální prostředí pro vznik bakterií a následného zánětu. Hlavním předpokladem pro krásnou a zdravou pleť je pravidelná péče.

Kosmetický přístroj BeautyRelax pleť důkladně vyčistí. V případě vzniku černých teček a pupínků napomáhá k jejich odstranění. Aplikační hlavice nasaje pokožku a hrana aplikátoru odstraní z povrchu nečistoty, **černé tečky a nevzhledné bílé čepičky**. Nepříjemnému ručnímu vymačkávání, které způsobí výrazně zarudnutí a podráždění pleti je definitivní konec! Povrchové pigmentové skvrnky a póry se zjemňují. Kosmetický přístroj BeautyRelax je vysoce účinný, ale zároveň šetrný k pleti!

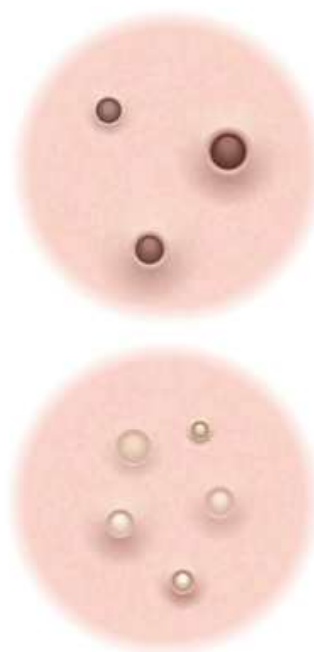


PROBLEMATIKA TVORBY ČERNÝCH TEČEK

Jednou z hlavních příčin vzniku černých teček je ucpání kožních pórů mazem nebo odumřelou pokožkou. Černá barva hlavičky ucpaného póru není nečistota. Jde o výsledek oxidace po vystavení mazu a odumřelých kožních buněk okolnímu prostředí. Kosmetický přístroj s vakuovým sáním patří mezi nejúčinnější metodu odstranění černých teček při co nejmenším podráždění pleti.

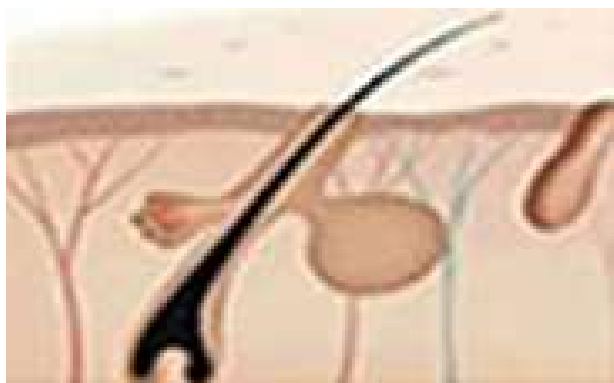


Mastnota z mazových žláz je uvolněna podél vlasových folikulů.

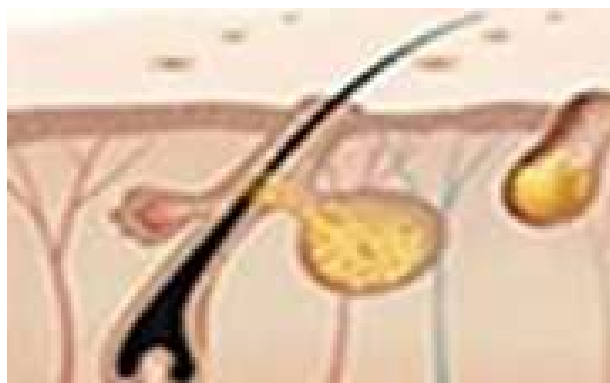

Mazové žlázy uvolňují větší či menší množství mastnoty dle různých faktorů.



Mastnota zbělá.

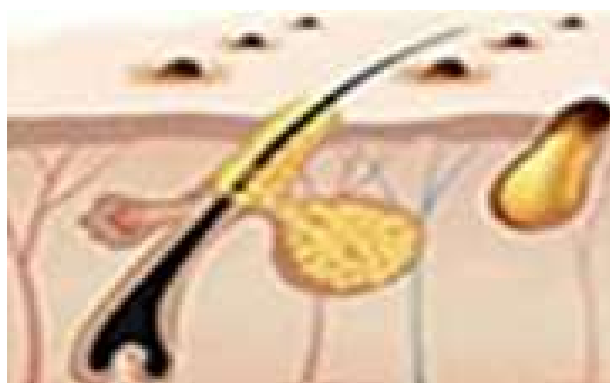

Mastnota je exponována a oxiduje ve vzduchu při vzniku velkého množství černých teček.

PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ

Naše pleť je vystavena celou řadu vnějších faktorů, které různou měrou ovlivňují kvalitu a rychlost stárnutí naší pleti. Slunce, prach, málo spánku, nesprávná životospráva, nedostatečné pravidelné vyčištění pleti od makeupu.



Zvětšené póry, zvýšený výskyt černých teček, neefektivní péče o pleť



Zvýšený výskyt bakterií, zvýšená citlivost pleti, větší náchylnost k tvorbě akné




Zvýšená produkce mazu, mastná pleť, která se velmi špatně čistí




Ucpané póry nečistotami ze zbytků make-upu se sníženým účinkem čištění pleti

POPIS PŘÍSTROJE

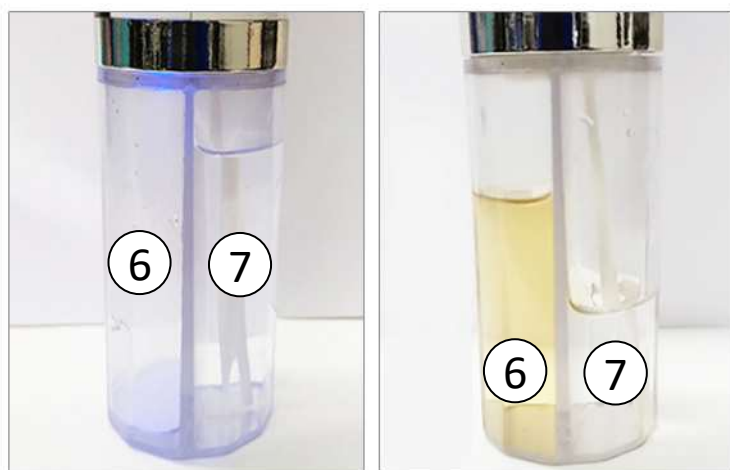

- 1. Aplikační hlavice
- 2. Ovládací panel
- 3. Nádobka na tekutinu
- 4. Tvrdý nástavec
- 5. Měkký nástavec
- 6. Část zásobníku na použitou vodu
- 7. Část zásobníku na čistou vodu

POPIS PŘÍSTROJE

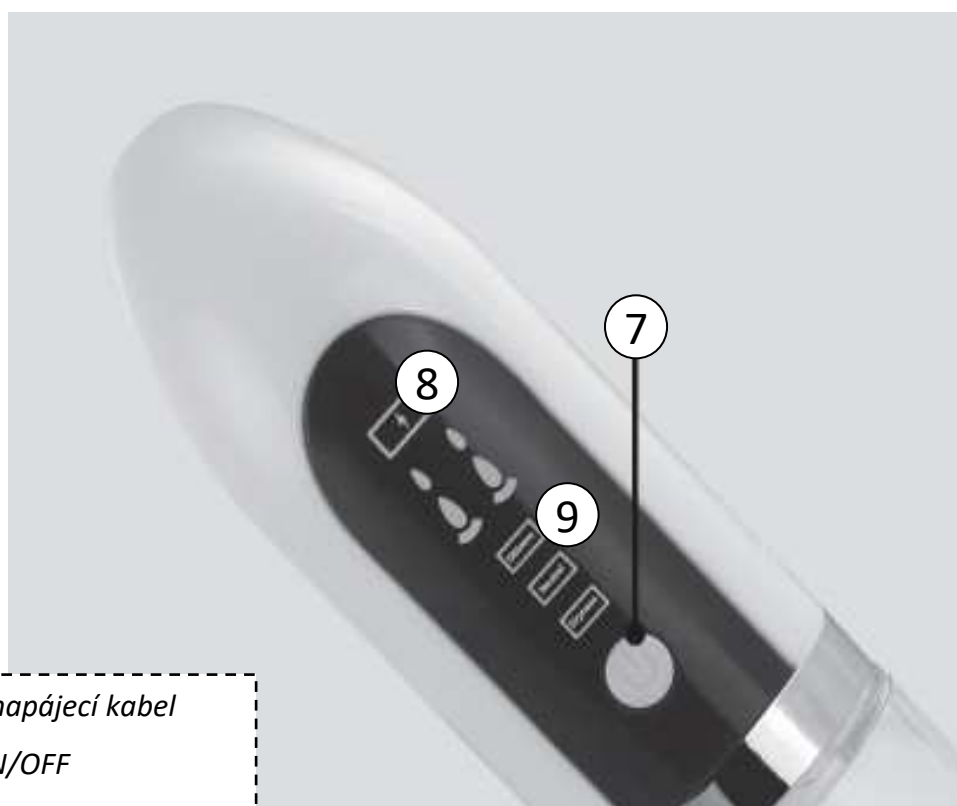

6. Vstup pro napájecí kabel

7. Tlačítko ON/OFF

8. Indikace baterie

9. Indikace výkonu vakuového

NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT


Než přistoupíte k samotné aplikaci pleti přístrojem, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Před prvním použitím přístroje si vyzkoušejte jeho aplikaci např. na předloktí. Vyčkejte přibližně 1 hodinu, zda při použití vakuového sání nebude pokožka negativně reagovat.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Přístroj nepoužívejte na silně zjizvenou pokožku.
- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte ekzémy nebo jiným kožním onemocněním.
- Pokud máte citlivou pleť, používejte přístroj se zvýšenou opatrností.
- Při použití se snažte dostatečně vyvinout tlak na pleť, aby vzniklo pevné spojení mezi aplikační hlavicí a pokožkou. V opačném případě, pokud nebude aplikační hlavice dostatečně těsnit, tekutina nebude zpět nasáta ale ztečně po pleti.
- Po použití může být pokožka mírně začervenalá. Jedná se o dočasný efekt, který by měl zmizet během několika desítek minut.
- Po použití je doporučeno používat vyživující masku, krém nebo noční krém. Ujistěte se, že používáte krém proti slunci, než vyjdete ven (v případě silného slunečního svitu).
- Po použití obličeje můžete po zklidnění pleti téměř ihned aplikovat make-up podle potřeby.



INTENZIVNÍ A VYSOCE ŠETRNÉ NASÁVÁNÍ

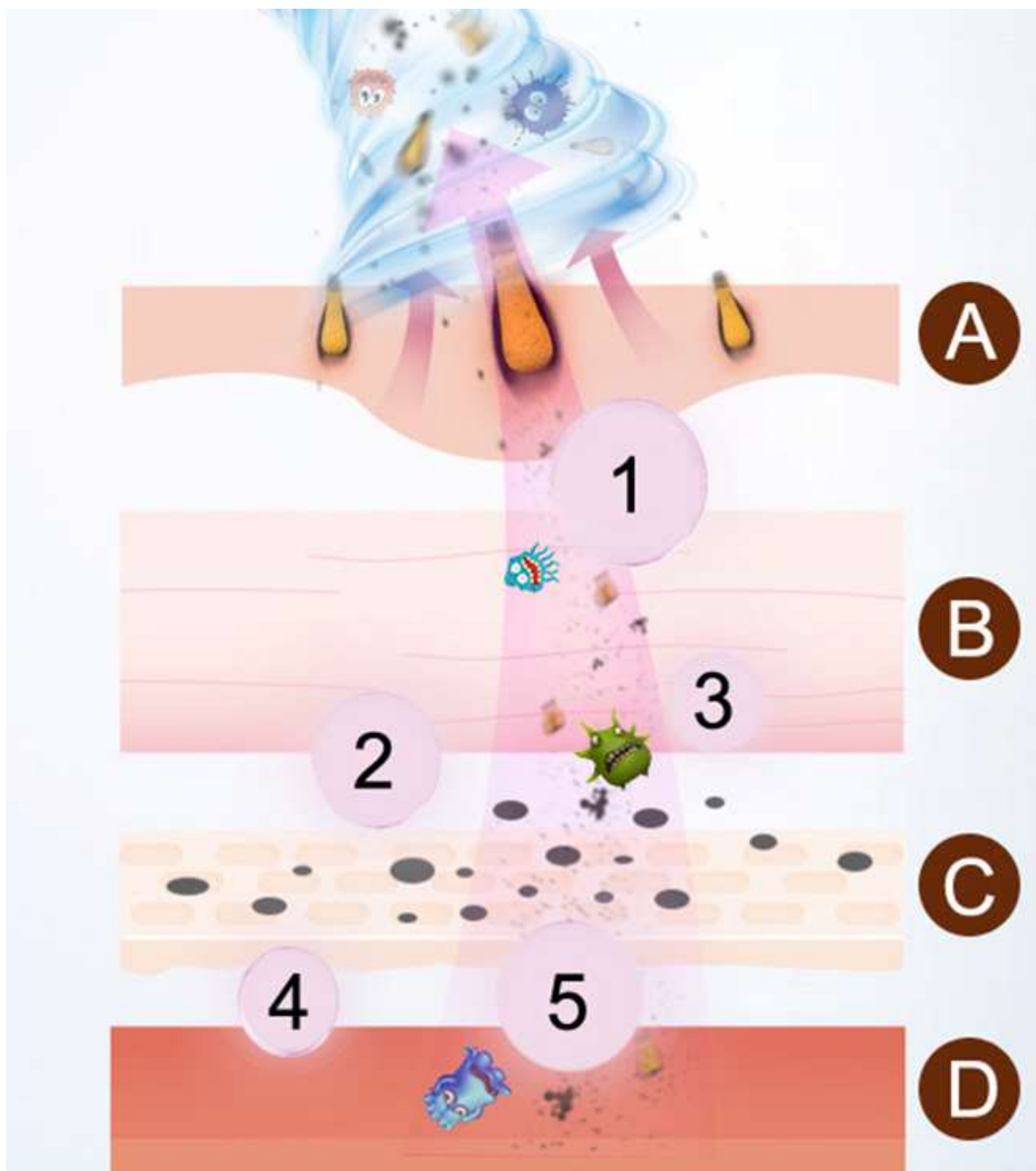

(1) černé tečky

(2) odumřelá kožní rezidua

(3) zbytky make-upu

(4) mastnota

(5) bakterie


(A) povrch pokožky

(B) zrohovatělá vrstva

(C) bazální vrstva

(D) dermis vrstva

VAKUOVÉ SÁNÍ 1-2-3

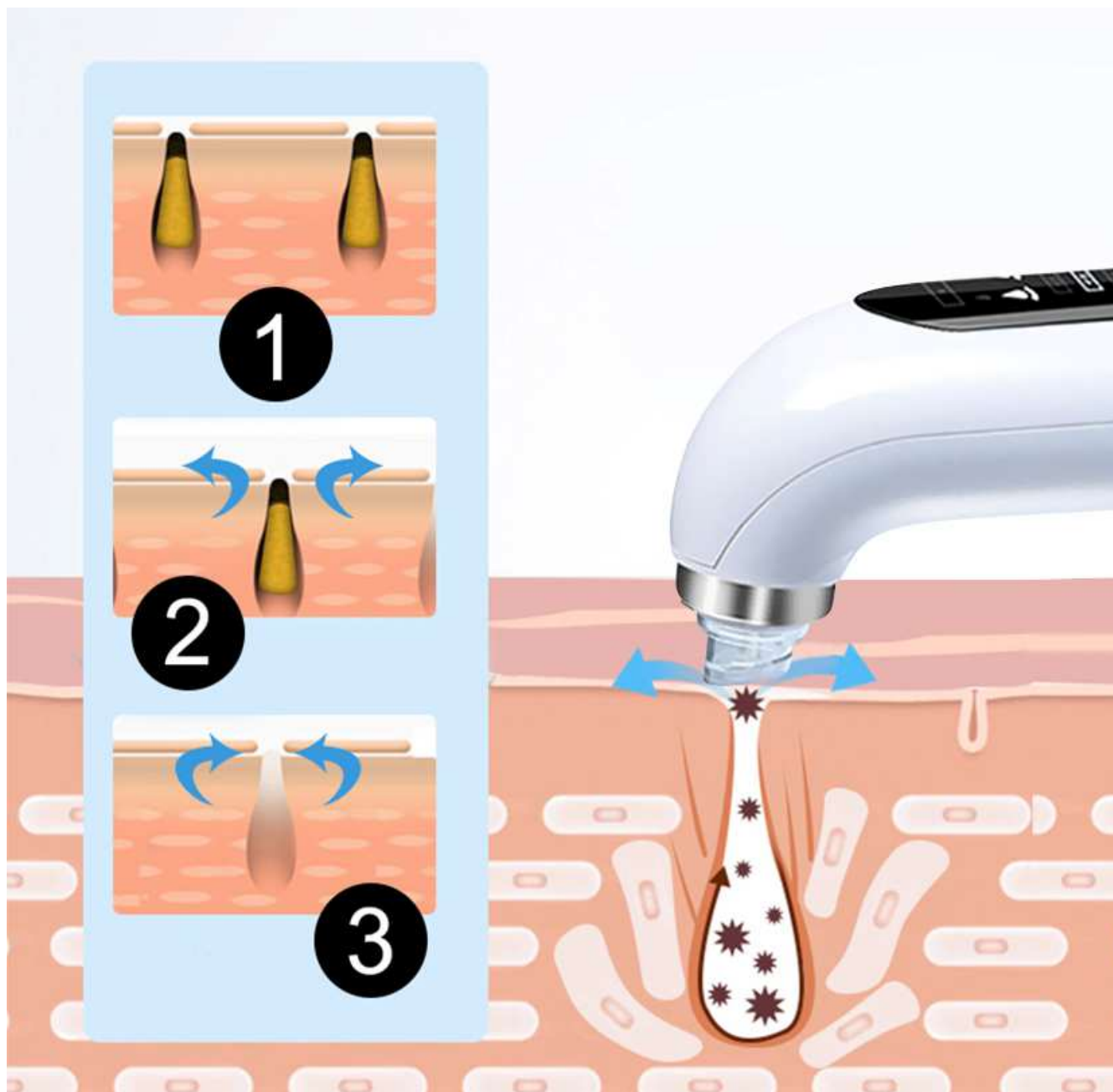

1. **OTEVŘENÍ:** otevření pórů, černé tečky.
2. **SÁNÍ:** vysávejte černé tečky a akné.
3. **SMRŠTĚNÍ:** zmenšuje póry a zklidňuje pokožku.

ROZLOŽENÍ VÝKONU VAKUOVÉHO SÁNÍ

Sílu vakuového sání si můžete nastavit individuálně podle vaší potřeby. V případě, že máte velmi citlivou pleť a znečištění není výrazné, použijte nižší výkon. Pokud je vaše pleť odolná a silně znečištěná, využijte vyššího výkonu. Pravidelným používáním si nastavení výkonu velmi rychle osvojíte. Vždy se snažte zvolit vhodný kompromis výkonu, aby byla aplikace účinná, ale zároveň pro vás komfortní. Počítejte s tím, že při vyšším výkonu bude pleť více podrážděná a zarudlá. Bude tak potřebovat delší čas na rekonvalescenci.

POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ



Každý máme jinou velikost obličeje, tvar a jinak citlivou pleť. Rozdíly jsou také v aktuální kondici pleti. Každý z nás je originál. Součástí balení je 6 různých aplikátorů, aby bylo použití kosmetického přístroje co nejvíce univerzální. Instrukce k jednotlivým aplikátorům jsou pouze obecné. V praxi si můžete sami vyzkoušet, která kombinace aplikátorů je pro vás nejvhodnější. Může se stát, že z dlouhodobého časového horizontu některé vůbec nevyužijete.

Aplikátory s větším otvorem používejte pro větší plochy obličeje. Aplikátory s menším průměrem naopak pro menší partie. Výkon vakuového sání si můžete upravit nejen pomocí tlačítka na ovládacím panelu. Aplikátory s tvrdým povrchem používejte pro intenzivní čištění pleti. Aplikátory z měkkého materiálu používejte v případě, pokud máte velmi citlivou pleť.

V balení je více aplikátorů, aby se přizpůsobili uživatelům se všemi typy pleti:



normální



suchá



smíšená



mastná




citlivá



akné

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Vysuňte z přístroje zásobník na tekutinu. Do zásobníku, kde se po připojení k přístroji nachází hadička, nalijte vodu. Hadička bude ze zásobníku čerpat čistou vodu. Pokud máte ve vašem bydlišti vodu se sníženou kvalitou (je příliš tvrdá nebo obsahuje větší množství chlóru) doporučujeme použít destilovanou nebo kojeneckou vodu. Množství vody by nemělo přesahovat okraj zásobníku.
2. Po naplnění vody připojte zásobník pevně k přístroji. Během používání probíhá cirkulace tekutiny. Ze zásobníku s čistou vodou je přečerpávána voda k vaší pleti, kde je vzápětí pomocí stejného aplikátoru opět nasáta. Použitá voda skončí v zásobníku s použitou vodou.
3. Zvolte vhodný aplikační nástavec dle vaší potřeby. Aplikační nástavec pevně připojte k aplikační hlavici přístroje.
4. Stiskněte 1x tlačítko ON/OFF. Přístroj začne ihned pracovat. Dalším stiskem tlačítka ON/OFF si můžete nastavit výkon vakuového nasávání. Schéma nastavení je následující:
0: Vypnuto – 1: nízká úroveň nasávání – 2: střední úroveň nasávání – 3: vysoká úroveň nasávání.
5. Dlouhý stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete kdykoliv přístroj vypnout.
6. Aplikační hlavice by měla být vždy v plném kontaktu s pletí. Zajistíte tím maximální efekt vakuového sání. Tekutina může plynule cirkulovat z nádoby s čistou vodou do nádoby s použitou vodou. Nepohybujte se aplikační hlavicí po pleti příliš rychle.
7. Aplikační hlavici se pohybujte viz. sekce návodu: **METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU**
8. Během používání si můžete druhou volnou rukou pleť mírně napnout, aby byla plocha, kterou přístrojem aplikujete, co nejvíce rovná.
9. Během používání **držte vždy přístroj za jeho tělo**. Není doporučeno držet přístroj během používání za zásobník. Mohlo by dojít k samovolnému odpojení zásobníku.
10. Po použití vždy vylijte veškerou tekutinu ze zásobníku. Zásobník propláchněte pod tekoucí vodou (neplatí pro samotný přístroj).
11. Během používání přístrojem netřepteje ani jej neotáčejte vzhůru nohama.
12. Pokud vám po skončení aplikace pleti zůstane v zásobníku voda, zásobník od přístroje opojte a veškerou tekutinu vylijte. Přístroj doporučujeme nechat zapnutý několik vteřin „naprázdno“, aby pokud možno uvnitř přístroje nezůstala žádná zbývající tekutina.

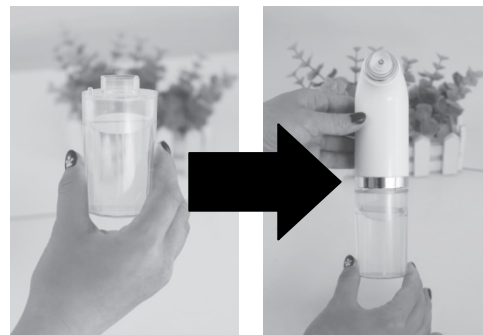

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Po každé výměně aplikační koncovky vždy zkontrolujte, že je pevně a správně „doražena“ na aplikační hlavici. Pokud koncovka není správně nasazena, může dojít k netěsnosti a snížení účinnosti přístroje.
- Přístroj nepoužívejte k odstraňování velkých nebo pevných částic nečistot. Je konstruován výhradně k jemnému čištění pleti, zejména k odstranění nadbytečné mastnoty a drobných nečistot z kožních pórů.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zásobník na vodu pevně a správně připojen k tělu přístroje. V opačném případě může dojít k úniku vody, snížení výkonu, nebo v krajním případě k oddělení zásobníku od těla přístroje při manipulaci.
- Během používání dbejte na správnou orientaci přístroje. Přístroj nesmí být držen „vzhůru nohama“ – zásobník s vodou musí vždy směřovat dolů. Současně vizuálně kontrolujte, že je vodní kabel (sací hadička) ponořen ve vodě. Pokud přístroj nakloníte tak, že vodní kabel nebude v dosahu vody, nebude docházet ke správnému nasávání vody ze zásobníku, i když je v něm voda přítomna.
- Přístroj držte vždy za hlavní tělo přístroje, nikoli za vodní zásobník. Tím předejdete jeho uvolnění nebo poškození spojení.
- Při aplikaci pleti se snažte udržovat aplikační hlavici v co nejdelším a plynulém kontaktu s pokožkou. Jen tak může přístroj efektivně a rovnoměrně přivádět vodu ze zásobníku na povrch pleti. Při vyšším nastavení sacího výkonu dochází k rychlejšímu odčerpávání vody. Může se stát, že po pleti bude stékat malé množství vody – jedná se o běžný jev, kdy při opakovaném přikládání zůstává voda na povrchu pokožky.
- Pro správnou a efektivní funkci přístroje je nutné, aby byla baterie vždy dostatečně nabitá. Nízká úroveň nabití může vést ke snížení výkonu nebo k přerušení provozu.

POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Maximální DÉLKA POUŽITÍ a FREKVENCE

- Maximální doba jedné aplikace: **10 až 15 minut**
- Jedna partie obličeje: **max. 2 až 3 minuty**
- Doporučená frekvence:
 - normální / mastná pleť: **1× až 2× týdně**
 - citlivá pleť: **1× za 7 až 10 dní**

Důvod: předejde se podlitinám, popraskaným žilkám a stížnostem typu „přístroj mi poškodil pleť“.

Upozornění na MODŘINY a PODLITINY

- Při příliš velmi dlouhém působení na jednom místě nebo při příliš vysokém výkonu u citlivé pleti může dojít k:
 - vzniku modřin
 - popraskání drobných kapilár
 - dočasnému ztmavnutí pleti
- Nejedná se o závadu přístroje, ale o důsledek nesprávného použití.

Jakou TEKUTINU lze a nelze použít

Povolené:

- čistá voda nebo destilovaná voda
- kojenecká voda

Zakázané:

- micelární voda
- tonika s alkoholem
- esenciální oleje
- oleje, séra, mléka
- pěny, gely, peelingy

Důvod: zanášení hadiček, snížení výkonu, zápach, reklamace.

Co dělat, když přístroj „NESAJE“

- zkontrolujte hladinu vody
- zkontrolujte ponoření hadičky
- zkontrolujte pevné nasazení aplikátoru
- zkontrolujte, zda je přístroj správně orientovaný
- zkontrolujte stav baterie

Skladování a ŽIVOTNOST

- Před uložením musí být přístroj:
 - zcela suchý
 - bez zbytkové vody
- Neskladujte:
 - v koupelně s vysokou vlhkostí
 - s nasazeným mokrým aplikátorem

SDÍLENÍ přístroje

- Pokud přístroj používá více osob:
 - aplikátory je nutné po každém použití dezinfikovat

Realistická OČEKÁVÁNÍ


- Přístroj nenahrazuje dermatologickou léčbu
- Výsledky jsou individuální a závisí na:
 - typu pleti
 - pravidelnosti používání
 - správné technice

DOSAŽITELNÉ ÚČINKY ČIŠTĚNÍ PLETI

Příklady dosažitelných účinků při pravidelném používání přístroje.



METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU

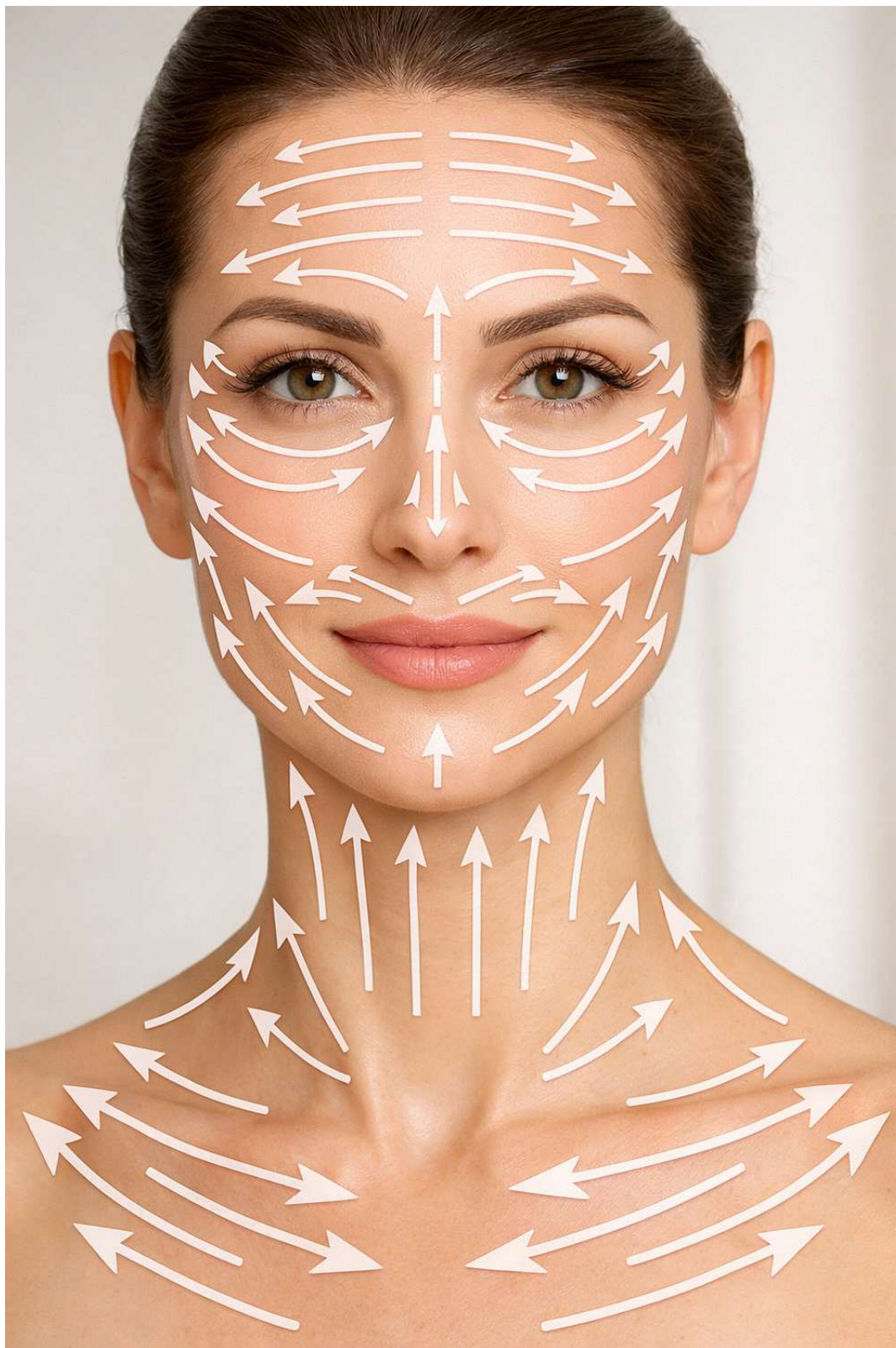

METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU

1. Čelo

- Pohybuj hlavicí **od středu čela směrem do stran k vlasové linii**
- Pohyby jsou **vodorovné, plynulé a lehce tažené ven**
- Postupuj po čele **odspodu nahoru**, aby byla pokryta celá plocha

2. Oblast mezi obočím (kořen nosu)

- Ved' hlavicí **od kořene nosu směrem vzhůru ke středu čela**
- Pohyb je **rovný, jemný a tažený nahoru**

3. Nos

- Začni u kořene nosu
- Pohybuj se **směrem dolů po hřbetu nosu**
- Po stranách nosu ved' pohyby **lehce šikmo ven směrem k tvářím**

4. Oční okolí (mimo oční víčka)

- Pohyby ved' **po kostním okraji očnice**, nikdy ne přímo na víčko
- Začni u vnitřního koutku oka
- Pokračuj **obloukovým pohybem směrem ven a lehce nahoru k spánkům**
- Pohyb je **velmi jemný, pomalý a plynulý**

5. Tváře

- Začni u nosu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k uším a lehce nahoru**
- Pohyby mohou být:
 - obloukové
 - nebo krátké tahy směrem vzhůru
- Cílem je **podpora liftingového efektu**

6. Oblast nad horním rtem

- Neaplikuj přímo na rty
- Pohybuj hlavicí **od středu nad horním rtem směrem šikmo nahoru k nosním křídlům**
- Pohyb je **jemný a krátký**

METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU

7. Okolí úst

- Začni u koutků úst
- Veď pohyb **směrem ven a lehce nahoru**
- Vyhni se přímému kontaktu se rty
- Pohyby jsou **obloukové, zjemňující mimické linie**

8. Brada a oblast pod bradou

- Na bradě veď pohyby **od středu brady do stran**
- Pod bradou pohybuj hlavicí **směrem vzhůru k čelisti**
- Pohyby jsou **tažené nahoru**, podporující zpevnění kontur

9. Krk

- Pohyby veď **od spodní části krku směrem vzhůru k bradě**
- Na stranách krku můžeš vést pohyb **šikmo nahoru**
- Vyhni se silnému tlaku v oblasti štítné žlázy

10. Dekolt

- Začni u středu dekoltu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k ramenům**
- Pohyby jsou **široké, plynulé a jemně tažené**

Obecná doporučení

- Pohyby jsou vždy **plynulé, pomalé a kontrolované**
- Netlač, nech hlavicí klouzat po pleti

Vždy se snaž pohybovat **směrem nahoru nebo ven**, nikoli dolů

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii s kapacitou 600mAh.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel se síťovým adaptérem (součást balení).
2. Nabíjecí kabel připojte do USB portu počítače nebo notebooku nebo síťového adaptéru.
3. Průběh nabíjení signalizuje ikona baterie na ovládacím panelu.
4. Čas nabíjení se může lišit v závislosti na stavu a kondici baterie.
5. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití přístroje vždy vylijte veškerou tekutinu ze zásobníku. Zásobník několikrát propláchněte pod tekoucí vodou (neplatí pro samotný přístroj). Přístroj doporučujeme nechat zapnutý několik vteřin „naprázdno“, aby pokud možno uvnitř přístroje nezůstala žádná zbývající tekutina. Pokud přístroj používá více osob, doporučujeme vyměnitelné nástavce dezinfikovat speciálním dezinfekčním sprejem na alkoholové bázi. Postačí i klasický čistý líh. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampóněk nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátorů nebo přístroje žádné ostré předměty, které by je mohly poškodit. K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj na čištění pleti

uvedený na trh pod modelovým označením: **Poremax Oxygen BR-2190**

EAN: **8594166118928**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1: 2017 EN 55014-2: 2015

Přístroj slouží ke kosmetické péči o pleť. Přístroj není zdravotnický prostředek.

Technologie přístroje slouží pro neinvazivní aplikaci na pleť. Žádná z částí aplikační hlavičky není schopna narušit integritu pleti. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění.

V případě používání více osobami je třeba dbát zvýšenou pozornost s hygienickými normami pro přístroje obdobného typu.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 15.4.2021