

NÁVOD K OBSLUZE

kosmetický přístroj
s LED fotonovou terapií
model BR-1190

RAINBOWTOUCH



OBSAH:

ÚVODEM	4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	4
VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH BAREV	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
OBSAH BALENÍ	7
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	8
DOPORUČENÁ METODA OŠETŘENÍ PLETI	9
NABÍJENÍ BATERIE	10
TECHNICKÉ PARAMETRY	10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	11
CERTIFIKACE	11
DOVOZCE	11

ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti či nesrovnalosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: rma@santadria.cz

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití poté konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání přístroje.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.
- Jakmile dokončíte nabíjení přístroje, vytáhněte kabel z USB portu.
- Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax RAINBOWTOUCH je kosmetický přístroj, který pracuje výhradně na bázi fotonové LED terapie. Speciální diody generují světlo o různých vlnových délkách pro řešení specifických kožních defektů. Kosmetické přístroje jsou často vybaveny pouze jedním světlem. Rainbowtouch vám jich nabízí rovnou 5!

Fotonová terapie LED světlem

Terapie světlem patří mezi nejstarší metody, které napomáhají v boji proti rozličným kožním defektům. Fotonová terapie využívá přirozené světelné vlny, které generují LED diody. Vlny ve specifických délkách jsou předávány do kůže. Světlo proniká do těla jako proud energie (ve formě fotonů), která je vstřebávána jednotlivými složkami kůže. Různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.

beautyrelax rainbow touch 

fotonové
světlo
1 přístroj
5 barev



VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH BAREV

ČERVENÉ SVĚTLO (vlnová délka 625nm)

- podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni
- brání v tvorbě pigmentu

MODRÉ SVĚTLO (vlnová délka 465nm)

- aktivuje porfyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie)
- antibakteriální a protizánětlivý účinek
- prevence proti tvorbě akné
- bezpečné a efektivní ošetření

ZELENÉ SVĚTLO (vlnová délka 525nm)

- přispívá k eliminaci epidermálních pigmentových skvrn
- zpomaluje produkci melaninu o 40 až 60%
- vyrovnává barevný tonus pokožky
- protizánětlivý účinek
- vhodný pro všechny typy pleti


ŽLUTÉ SVĚTLO (vlnová délka 590nm)

- podporuje absorbování kosmetických přípravků
- přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu
- zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti
- obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu
- napomáhá zpomalovat stárnutí kůže

RŮŽOVÉ SVĚTLO (vlnová délka 700nm)

- podporuje absorbování kosmetických přípravků

POPIS PŘÍSTROJE

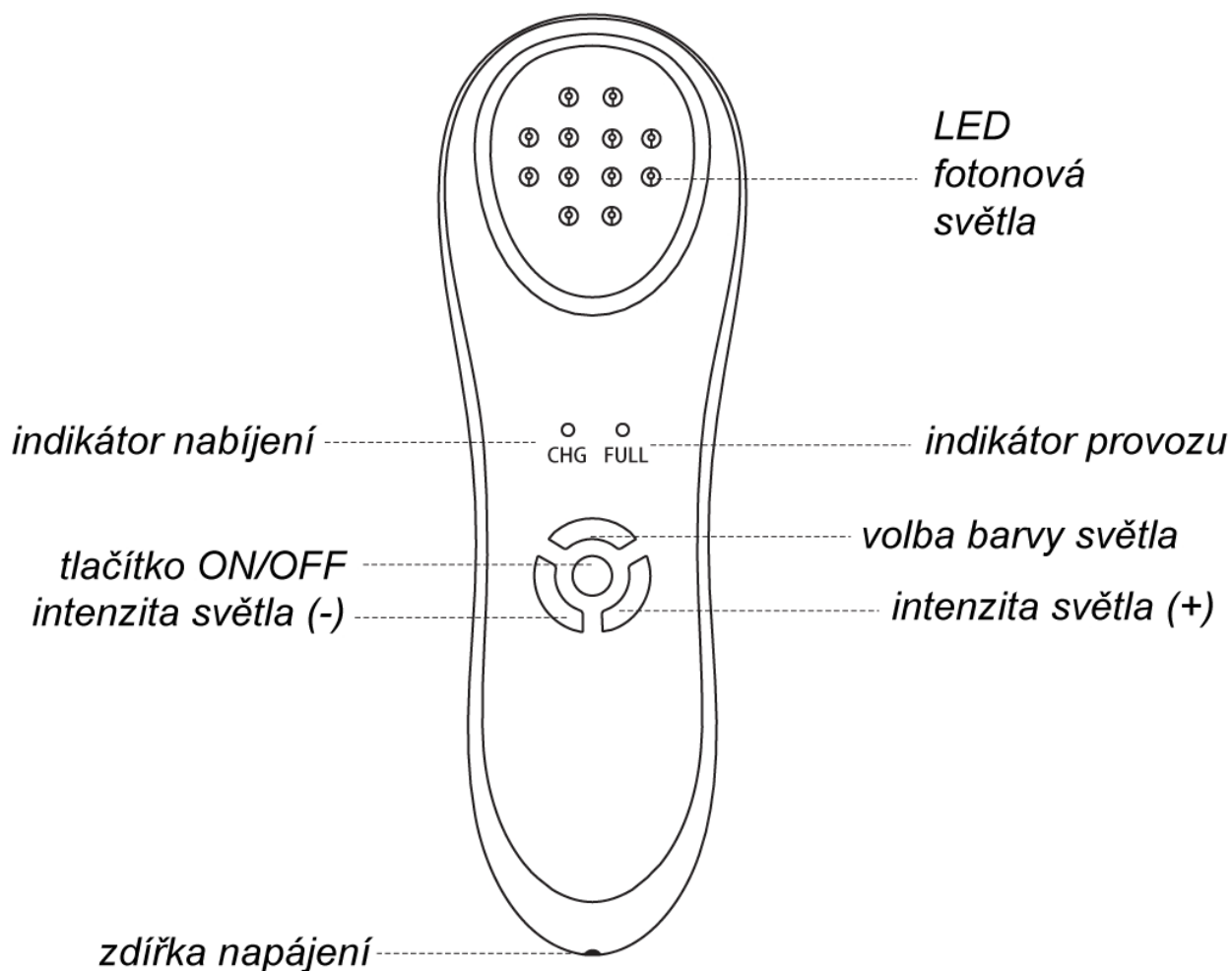


OBSAH BALENÍ

- kosmetický přístroj BeautyRelax RAINBOWTOUCH
- napájecí USB kabel
- návod k obsluze

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE


1. Přístroj je vypnutý. Odstraňte všechny obalové materiály, krycí plastové fólie, atd. Odliďte obličej. Pečlivě jej omyjte a vysušte. Sundejte si náušnice, přívěsky, příp. jiné šperky.

2. Stiskněte tlačítko ON/OFF v délce 3 sekund. Přístroj se zapne a rozsvítí se modrá kontrolka FULL. Ihned po zapnutí se rozsvítí červené světlo LED fotonové terapie.

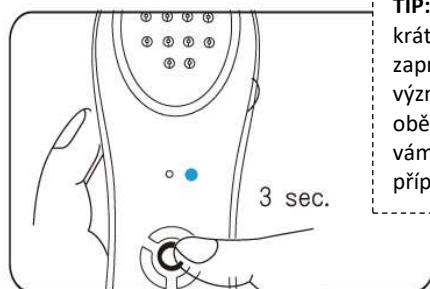


TIP: V průběhu ošetření pleti můžete krátkým stiskem tlačítka ON/OFF zapnout funkci vibrace. Vibrace významně podporují lokální krevní oběh a následné lepší vstřebávání vámi používaných kosmetických přípravků s vyživujícími složkami.

3. Nyní můžete měnit barvu světla fotonové terapie stisknutím tlačítka se značkou . Stiskem tohoto tlačítka lze přepínat jednotlivé barvy – červená, zelená, modrá, žlutá, růžová a růžová (v režimu blikání).

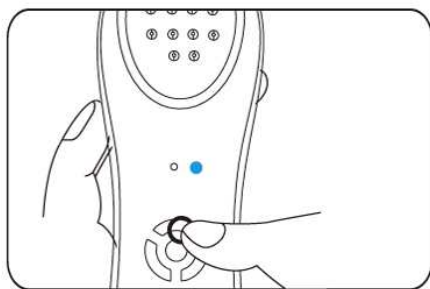

4. Můžete si také zvolit svítivost LED světla pomocí tlačítek (+) a (-). K dispozici je celkem 7 úrovní intenzity.

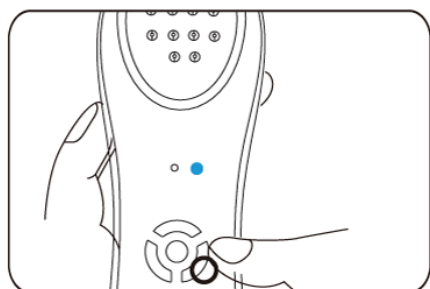

5. Přístroj se vypne automaticky po 15 minutách provozu. Vypnout ho můžete ručně stisknutím tlačítka ON/OFF. Pokud začne blikat červená kontrolka, je třeba nabít baterii.

Během ošetření přístrojem mějte vždy zavřené oči. Snažte se vyhnout přímému sledování zdroje světla. Nikdy nezakrývejte horní mřížku pro zajištění proudění vzduchu.

DOPORUČENÁ METODA OŠETŘENÍ PLETI

Aplikační hlavici se pohybujte ve směru šipek. Při ošetření se snažte, aby byla aplikační hlavice co nejvíce v kontaktu s pletí. Pohybujte se pomalu, zlehka. Vždy mějte zavřené oči. Vyhýbejte se ošetření očí a blízké oblasti kolem očí. Každou oblast ošetření si můžete rozvrhnout na jiný den. Ideální je ošetření ve dvou krocích. Nejprve použijte vaši oblíbenou pleťovou masku, kosmetický přístroj nebo sérum. Ve druhém kroku použijte LED fotonové světlo s barvou dle vašeho výběru.




ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru

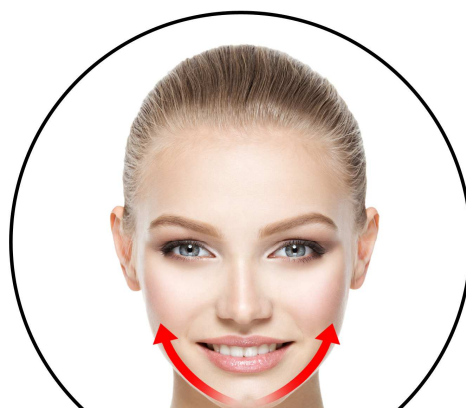

BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

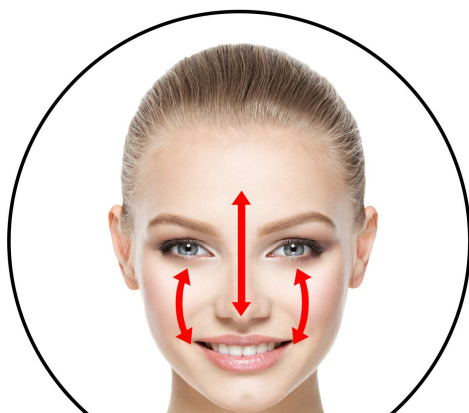

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Detox lymfatických cest: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii typu Li-ion s kapacitou **750mAh**. Při plném nabití se provozní doba pohybuje v rozsahu od 1 až 1,5 hodiny. To však platí pouze při nejnižší intenzitě fotonového světla. Při vyšším výkonu a aktivní funkce vibrací se výdrž velmi výrazně zkracuje.

Postup nabíjení:

1. Připojte přístroj k nabíjecímu kabelu.
2. Napájecí kabel zapojte do USB portu počítače, notebooku nebo 220V USB adaptéru (není součástí balení).
3. Průběh nabíjení signalizuje blikající červená kontrolka. Jakmile je baterie plně nabitá, rozsvítí se modrá kontrolka.
4. Po ukončení nabíjení vytáhněte napájecí kabel.

Poznámka: Přístroj můžete také nabíjet přes USB kabel prostřednictvím adaptéru do sítě 220V (není součástí balení). Pokud máte zájem případně adaptér dokoupit, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY

- 5 barev světla s různou vlnovou délkou: červená, modrá, zelená, žlutá, růžová
- 7 úrovní intenzity
- proud: 500mA
- automatické vypnutí: po 15 minutách
- provozní doba: přibližně 1 hodinu (při nejnižším výkonu světla bez vibrací)
- délka nabíjení: 1 až 2 hod.
- nabíjení: pomocí USB kabelu (součástí balení)
- kapacita baterie: 750mAh
- výkon: 3,5W
- rozměry: 15,5x5,1x4cm
- hmotnost: 76g

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Tímto přípravkem čistěte výhradně obě aplikační hlavice. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.