

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj na vrásky

BeautyRelax BR-1500

RFLIFT



OBSAH:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
KDY NENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE DOPORUČENO	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
OBSAH BALENÍ	7
HLAVNÍ VÝHODY	7
VLASTNOSTI PŘÍSTROJE	7
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	8
POPIS PŘÍSTROJE	8
VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ	9
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE KROK ZA KROKEM	9
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	9
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	9
MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ	10
DOPORUČENÉ POHYBY PŘÍSTROJE	11
MAPA CITLIVOSTI PLETI	12
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	13
NABÍJENÍ BATERIE	15
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	17
PÁR VĚT ZÁVĚREM	18
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	19
CERTIFIKACE	23
EU DISTRIBUTOR	23
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	24

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- BeautyRelax RFlift Premium je kosmetický přístroj určený pro neinvazivní péči o pokožku obličeje, okolí očí a krku. Ošetření probíhá bez narušení povrchu pokožky, protože žádná část přístroje neproniká pod její svrchní vrstvu. Přístroj není zdravotnickým prostředkem a je určen výhradně ke kosmetickým účelům.
- Díky neinvazivnímu principu je přístroj vhodný pro pravidelné domácí používání. Jeho ovládání je jednoduché a nevyžaduje odborné znalosti ani dohled zdravotnického či kosmetického personálu.
- BeautyRelax RFlift splňuje příslušné evropské požadavky na bezpečnost elektrických spotřebičů a je navržen s důrazem na bezpečné používání v domácím prostředí.
- Pro správnou funkci přístroje vždy používejte čirý vodivý gel na vodní bázi (např. Sonogel nebo jiný ultrazvukový kontaktní gel). Gel je běžně dostupný v lékárnách nebo prodejnách zdravotnických potřeb. Vodivý gel zajišťuje optimální kontakt mezi ošetřovací hlavicí a pokožkou, podporuje účinnější přenos radiofrekvenční energie (RF) a elektrických impulsů EMS, usnadňuje plynulý pohyb hlavičky po pokožce a zvyšuje komfort ošetření.
- Během ošetření pohybujte hlavicí pomalu a plynule po pokožce podle doporučených masážních linií. Nenechávejte ji dlouhodobě na jednom místě. Ošetření vždy začínejte na nejnižší úrovni intenzity a výkon zvyšujte postupně podle citlivosti pokožky. Běžným projevem je pocit příjemného tepla nebo jemného mravenčení. Pokud pocítíte bolest nebo výrazné nepohodlí, intenzitu snižte nebo ošetření přerušte.
- Každé ošetření by mělo trvat přibližně 6 až 10 minut podle zvoleného programu. Přístroj používejte 2 až 3krát týdně. Pokožka potřebuje dostatek času na přirozenou regeneraci a tvorbu nových kolagenních vláken. Častější používání nebo vyšší intenzita automaticky neznamenají lepší výsledky.
- Po každém použití očistěte ošetřovací hlavicí měkkým navlhčeným hadříkem nebo dezinfekčním prostředkem vhodným pro kosmetické přístroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani přístroj neponořujte do vody. Před uložením musí být hlavička zcela suchá.
- Přístroj skladujte na suchém místě při pokojové teplotě, mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a dosah dětí.
- Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání přístroje, obraťte se na zákaznickou podporu nebo autorizovaného prodejce značky BeautyRelax.
- Přejeme vám, aby se BeautyRelax RFlift stal oblíbenou součástí vaší pravidelné péče o pleť a přispěl k jejímu zdravému, svěžímu a mladistvému vzhledu.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, seznamte se se všemi obrázky a návod uschovejte pro pozdější použití.
- Přístroj používejte výhradně k domácí kosmetické péči o pokožku obličeje, okolí očí a krku v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Pokud trpíte závažným kožním onemocněním nebo si nejste jisti, zda je používání přístroje pro vás vhodné, poraďte se před použitím se svým lékařem.
- Přístroj nepoužívejte v případě těhotenství, při nošení kardiostimulátoru nebo jiného implantovaného elektronického zařízení ani při dalších kontraindikacích uvedených v tomto návodu.
- Pro správnou funkci přístroje vždy používejte vodivý gel na vodní bázi.
- Pokud přístroj používá více osob, po každém použití důkladně očistěte a dezinfikujte ošetřovací hlavici.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený, nepracuje správně nebo spadl do vody.
- Je-li přístroj poškozený nebo prasklý, nedotýkejte se jeho vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Po pádu na zem může dojít k poškození vnitřních součástí. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis.
- Přístroj nepoužívejte během nabíjení.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, umyvadlo, bazén apod.).
- Přístroj není vodotěsný. Nikdy jej neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Po každém použití přístroj vypněte a uložte na bezpečné místo.
- Pokud byl přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí, ponechte jej před použitím alespoň 3 hodiny aklimatizovat.
- Přístroj není určen dětem ani osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dozoru odpovědné osoby.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Přístroj nepokládejte na horké povrchy ani do jejich blízkosti (radiátor, kamna, otevřený oheň apod.).
- Přístroj žádným způsobem nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisu.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí chráněném před prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Během provozu přístroj ničím nezakrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Nepoužívejte přístroj déle, než je doporučeno v tomto návodu, ani neopakujte ošetření stejného místa bezprostředně po sobě.
- V případě bolesti, pálení, výrazného zarudnutí nebo jiné neobvyklé reakce pokožky přístroj okamžitě vypněte a další použití přerušete.
- Distributor ani výrobce neodpovídají za škody na zdraví nebo majetku způsobené používáním přístroje v rozporu s tímto návodem, nedodržením bezpečnostních pokynů nebo neodbornými zásahy do zařízení.

POUŽITÍ SONOGELU

Pro správnou funkci přístroje BeautyRelax RFlift je nutné používat vodivý gel na vodní bázi. Doporučujeme čirý kontaktní ultrazvukový gel (např. Sonogel nebo jiný zdravotnický kontaktní gel bez parfemace a dalších přísad), který je běžně dostupný v lékárnách nebo prodejnách zdravotnických potřeb.



Vodivý gel vytváří optimální kontakt mezi ošetrovací hlavicí a pokožkou. Díky tomu umožňuje účinnější přenos radiofrekvenční energie (RF) a elektrických impulsů EMS do pokožky, zajišťuje plynulý pohyb hlavičky po pleti a současně snižuje tření. Přispívá tak k vyššímu komfortu při ošetření i k dosažení optimálních výsledků.

Použití přístroje bez vodivého gelu se nedoporučuje, protože může výrazně snížit účinnost ošetření a způsobit nepříjemné pocity při kontaktu hlavičky s pokožkou.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

KDY NENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE DOPORUČENO

Přístroj **není** doporučené používat pro osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- během těhotenství a kojení,
- osobám s kardiostimulátorem nebo jinými implantovanými elektronickými přístroji,
- při onkologickém onemocnění,
- při epilepsii,
- při závažných srdečních onemocněních,
- při poruchách citlivosti pokožky,
- při akutních zánětlivých nebo infekčních onemocněních,
- při horečce nebo celkovém oslabení organismu,
- při otevřených ranách, odřeninách nebo popáleninách,
- na zanícenou, podrážděnou nebo silně citlivou pokožku,
- na místa s ekzémem, lupénkou nebo jinými aktivními kožními onemocněními,
- na oblast s virovými bradavicemi nebo oparem,
- bezprostředně po estetických zákrocích (laser, chemický peeling, výplně, botulotoxin, mikro Jehličkování apod.), dokud použití neschválí lékař,
- po plastických operacích v ošetřované oblasti do úplného zhojení,
- při přítomnosti kovových implantátů v ošetřované oblasti (pokud lékař nedoporučí jinak),
- při závažných očních onemocněních (např. glaukom, odchlípení sítnice nebo po operaci očí bez souhlasu očního lékaře).

Přístroj nepoužívejte:

- přímo na oční víčka nebo oční bulvy,
- na štítnou žlázu,
- na oblast hrdla v okolí hrtanu,
- na otevřené rány nebo krvácející místa,
- na sliznice.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ přístroje: kosmetický přístroj na vrásky
- Model: BeautyRelax RFlift
- Technologie: 2 MHz radiofrekvence (RF), EMS, LED fotonová terapie
- Raofrekvenční frekvence: 2 MHz
- EMS stimulace: ano
- LED světelná terapie: ano
- Vlnové délky LED: 595 nm (žlutá), 635 nm (červená), 940 nm (infračervená)
- Počet režimů: 4
- Režimy ošetření: obličej, okolí očí, V-Lift (kontury obličeje), krk
- Úroveň intenzity: 3
- Typ ovládání: tlačítkové
- Displej: LED světelná indikace
- Masážní hlavice: ergonomická
- Doporučené použití: s vodivým gelem nebo sérem na vodní bázi
- Napájení: vestavěný Li-Ion akumulátor
- Kapacita baterie: 1000 mAh
- Doba nabíjení: přibližně 1 hodina
- Výdrž baterie: až 40 minut provozu
- Nabíjecí konektor: USB-C
- Nabíjení: nabíjecí základna
- Bezdrátový provoz: ano
- Automatické vypnutí: ano
- Materiál: ABS plast, nerezová ošetrovací hlavice
- Určeno pro: obličej, okolí očí, krk a dekolt
- Doporučená frekvence používání: 3–5× týdně
- Barva: bílá se zlatými prvky
- Obsah balení: kosmetický přístroj, nabíjecí základna USB-C, USB kabel, síťový adaptér, návod k použití
- Rozměry: 175 × 48 × 43 mm
- Hmotnost: přibližně 155 g

OBSAH BALENÍ

- 1x Kosmetický přístroj BeautyRelax
- 1x Nabíjecí stojánek
- 1x USB kabel
- 1x Napájecí adaptér 220V
- 1x Návod k obsluze

HLAVNÍ VÝHODY

- Kombinuje tři technologie v jednom přístroji – RF radiofrekvenci, EMS stimulaci a LED fotonovou terapii.
- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu a elastinu pro pevnější a pružnější pleť.
- Pomáhá redukovat vzhled jemných vrásek a zlepšovat elasticitu pokožky.
- Přispívá ke zpevnění kontur obličeje a liftingovému efektu.
- Tři druhy LED světla cílí na rozjasnění, regeneraci a obnovu pokožky.
- Nabízí čtyři programy pro péči o obličej, oční okolí, kontury obličeje a krk.
- Tři nastavitelné úrovně intenzity umožňují přizpůsobit ošetření citlivosti pokožky.
- Ergonomická vyhřívaná hlavička zajišťuje pohodlné a efektivní ošetření.
- Podporuje lepší vstřebávání sér a dalších kosmetických přípravků.
- Bezdrátové provedení s nabíjecí základnou umožňuje komfortní používání.
- Intuitivní ovládání jedním tlačítkem usnadňuje každodenní použití.
- Kompaktní design je vhodný pro domácí použití i na cesty.
- Neinvazivní péče bez jehel a bez rekonvalescence.
- Pravidelné používání pomáhá udržovat pleť hladší, pevnější a svěžejší.
- Vhodný pro péči o všechny typy pleti.

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

- 2 MHz radiofrekvenční technologie (RF) pro podporu tvorby kolagenu a zpevnění pokožky
- EMS elektrická stimulace obličejových svalů pro zlepšení kontur obličeje
- LED fotonová terapie se třemi vlnovými délkami (595 nm, 635 nm, 940 nm)
- 4 režimy ošetření: obličej, okolí očí, kontury obličeje (V-Lift), krk
- 3 nastavitelné úrovně intenzity
- Ergonomická masážní hlavice pro pohodlné použití
- Tepelné ošetření podporující vstřebávání kosmetických přípravků
- Bezdrátový provoz
- Intuitivní ovládání jedním tlačítkem
- LED indikace zvoleného režimu
- Automatické vypnutí po ukončení programu
- USB-C se síťovým adaptérem nabíjení prostřednictvím nabíjecí základny

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Kosmetický přístroj na vrásky BeautyRelax RFlift je moderní zařízení pro domácí péči o pleť, které kombinuje 2 MHz radiofrekvenční technologii (RF), EMS elektrickou stimulaci svalů a LED fotonovou terapii. Tato kombinace podporuje přirozenou tvorbu kolagenu a elastinu, pomáhá zlepšit pružnost pokožky, zpevnit kontury obličeje a zmírnit viditelnost jemných vrásek. LED světelná terapie využívá tři vlnové délky – žluté světlo (595 nm) pro rozjasnění a sjednocení tónu pleti, červené světlo (635 nm) pro podporu regenerace a elasticity a infračervené světlo (940 nm) pro hloubkovou obnovu pokožky. Přístroj nabízí čtyři specializované režimy pro ošetření celého obličeje, okolí očí, kontur obličeje a krku a tři nastavitelné úrovně intenzity, které umožňují přizpůsobit péči individuálním potřebám. Ergonomicky tvarovaná masážní hlavice se přizpůsobí konturám obličeje a při použití s vodivým gelem nebo sérem podporuje lepší vstřebávání aktivních látek. Vestavěná baterie s kapacitou 1000 mAh poskytuje až 40 minut provozu na jedno nabití a elegantní nabíjecí základna s USB-C zajišťuje pohodlné každodenní používání. BeautyRelax RFlift představuje účinné řešení pro pravidelnou domácí péči, které pomáhá udržovat pleť pevnější, hladší, svěžejší a viditelně mladistvější.



Radiofrekvenční technologie (RF)

Radiofrekvenční technologie (Radio Frequency) představuje jednu z nejpoužívanějších metod moderní neinvazivní péče o pleť. BeautyRelax RFlift využívá radiofrekvenční energii o frekvenci 2 MHz, která při kontaktu s pokožkou vytváří jemné a kontrolované zahřívání hlubších vrstev kůže. Působením tepelné energie dochází ke stimulaci přirozených regeneračních procesů pokožky. Radiofrekvenční energie podporuje aktivitu buněk odpovědných za tvorbu kolagenu a elastinu – dvou základních bílkovin, které zajišťují pevnost, pružnost a mladistvý vzhled pokožky. Pravidelným používáním může radiofrekvenční ošetření přispět ke zlepšení elasticity pokožky, redukci jemných vrásek, zpevnění kontur obličeje a celkovému omlazení vzhledu pleti. Při ošetření je důležité používat vodivý gel, který zajišťuje optimální přenos radiofrekvenční energie do pokožky a umožňuje plynulý pohyb hlavičky po povrchu pleti.

EMS elektrická stimulace svalů

EMS (Electrical Muscle Stimulation) využívá jemné elektrické impulzy, které stimulují drobné obličejové svaly. Stejně jako svaly ostatních částí těla mohou i obličejové svaly s přibývajícím věkem postupně ztrácet svůj tonus. To může přispívat k ochabování kontur obličeje a vzniku hlubších mimických vrásek. Elektrické impulzy vytvářené přístrojem vyvolávají jemné stahy svalových vláken, čímž podporují jejich aktivitu. Výsledkem může být pevnější vzhled kontur obličeje, lepší tonus pokožky a svěžejší vzhled pleti. Během ošetření můžete cítit jemné mravenčení nebo lehké pulzování. Tyto pocity jsou zcela běžné a jsou projevem správné funkce EMS technologie.

LED fotonová terapie

BeautyRelax RFlift využívá LED světelnou terapii, která představuje šetrnou metodu kosmetické péče bez použití ultrafialového záření. Jednotlivé barvy světla mají odlišnou vlnovou délku a jsou určeny pro různé potřeby pokožky.

Žluté světlo (595 nm)

Žluté světlo pomáhá rozjasnit unavenou pleť a sjednotit její barevný tón. Podporuje zdravější vzhled pokožky a přispívá k její celkové vitalitě.

Je vhodné zejména pro mdlou, unavenou nebo citlivější pleť.

Červené světlo (635 nm)

Červené světlo patří mezi nejpoužívanější světelné technologie v kosmetické péči. Podporuje přirozenou regeneraci pokožky, přispívá ke zlepšení její pružnosti a pomáhá redukovat viditelnost jemných vrásek.

Při pravidelném používání může pleť působit pevnějším, hladším a mladistvějším dojmem.

Infračervené světlo (940 nm)

Infračervené světlo proniká hlouběji než světlo viditelného spektra. V kosmetické péči se používá jako doplněk radiofrekvenční technologie a podporuje přirozené regenerační procesy pokožky.

Současně napomáhá příjemnému prohřátí ošetřované oblasti a zvyšuje komfort během aplikace.

Synergické působení technologií

BeautyRelax RFlift využívá kombinaci tří moderních kosmetických technologií – radiofrekvenční energie (RF), EMS elektrické stimulace svalů a LED fotonové terapie. Každá z těchto technologií působí na pokožku odlišným způsobem a zaměřuje se na jinou část procesu péče o pleť. Jejich současné použití umožňuje dosáhnout komplexnějšího účinku, než kdyby byly používány samostatně.

Radiofrekvenční technologie působí především v hlubších vrstvách pokožky, kde vytváří kontrolované zahřívání. Tím podporuje přirozené regenerační procesy a přispívá ke stimulaci tvorby kolagenu a elastinu, které jsou důležité pro pevnost a pružnost pokožky.

EMS technologie se zaměřuje na drobné obličejové svaly. Jemné elektrické impulzy podporují jejich aktivitu a tonus, což může přispět k pevnějším konturám obličeje a mladistvějšímu vzhledu.

LED fotonová terapie doplňuje účinek radiofrekvence a EMS. Jednotlivé vlnové délky světla podporují přirozenou regeneraci pokožky, sjednocují její vzhled a přispívají ke zlepšení celkové vitality pleti.

Během ošetření všechny technologie pracují současně a vzájemně se doplňují. Radiofrekvenční energie podporuje obnovu kožní struktury, EMS stimuluje obličejové svaly a LED světlo působí na povrchové i hlubší vrstvy pokožky podle zvolené vlnové délky. Díky této kombinaci dochází ke komplexní péči o pokožku i podkožní tkáň.

Pravidelné používání přístroje podle doporučeného postupu může přispět ke zlepšení elasticity pokožky, zpevnění kontur obličeje, zmírnění vzhledu jemných vrásek a celkovému rozjasnění pleti. Nejlepších výsledků je zpravidla dosahováno při dlouhodobém a pravidelném používání v kombinaci s vhodnou kosmetickou péčí.

BOJUJE PROTI VIDITELNÝM ZNÁMKÁM STÁRNUTÍ

NOSOLABIÁLNÍ VRÁSKY | VRÁSKY KOLEM OČÍ
VRÁSKY NA ČELE | VRÁSKY NA KRKU

PROFESIONÁLNÍ REŽIMY:

- **BOOST KOLAGENU**
Zpevňuje a vyhlazuje celou pleť
- **REJUVENACE OČÍ**
Redukuje otoky, tmavé kruhy a jemné vrásky
- **V-LIFTING**
Zvedá kontury a obnovuje pevnost pleti
- **ZPEVNĚNÍ KRKU**
Vyhlazuje a zpevňuje oblast krku



VIDITELNÉ
VÝSLEDKY



BEZPEČNÉ
A ŠETRNÉ



RYCHLÉ
A EFEKTIVNÍ



PRO KAŽDÝ
TYP PLETI

EMS TECHNOLOGIE AKTIVUJE SÍLU VAŠEHO TĚLA

EMS stimuluje fascii a svaly, zvyšuje tvorbu ATP a urychluje metabolismus pro **okamžité zpevnění, lifting a redukci otoků.**



AKTIVUJE
fascii a svaly



ZVYŠUJE ATP
více energie
pro buňky



**URYCHLUJE
METABOLISMUS**
spaluje tuky



OKAMŽITÝ LIFTING
viditelně zpevňuje
a vyhlazuje




REDUKUJE OTOKY
podporuje lymfatický
systém

VÍCE ENERGIE. PEVNĚJŠÍ TVAR. OKAMŽITĚ.

FOTONOVÁ PÉČE PRO MLADŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ PLEŤ

3 VLNOVÉ DÉLKY – 3 ÚČINKY PRO VAŠI PLEŤ

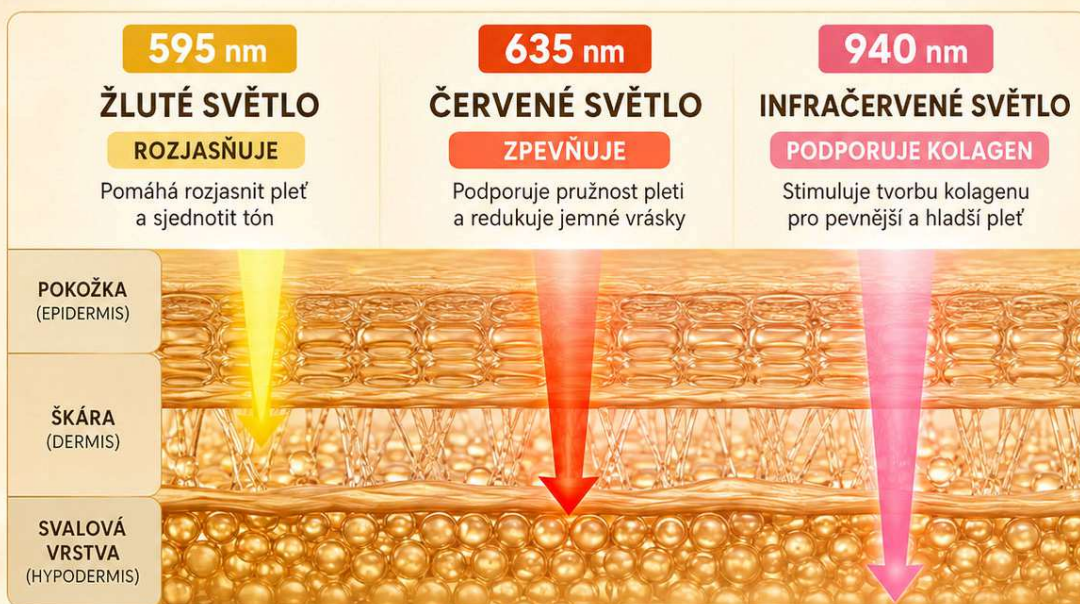

JASNĚJŠÍ
A ZÁŘIVĚJŠÍ PLEŤ



VYHLAZUJE
JEMNÉ VRÁSKY



ZPEVNŮJE
A ZLEPŠUJE
PRUŽNOST



PODPORUJE
PŘIROZENOU
OBNOVU PLETI



BEZPEČNÉ – NEINVAZIVNÍ – VHODNÉ PRO KAŽDÝ TYP PLETI

POPIS PŘÍSTROJE

Ošetřovací hlavice

Indikátor úrovně / nabíjení

Zobrazuje aktuální úroveň intenzity a stav nabíjení.

Tlačítko úrovně

Slouží k nastavení úrovně intenzity.

Tlačítko napájení / režimu


Dlouhým stisknutím přístroj zapnete nebo vypnete. Krátkým stisknutím přepínáte mezi režimy.

Indikátor režimu

Zobrazuje aktuálně zvolený režim.

Indikátor napájení

Zobrazuje stav zapnutí přístroje.

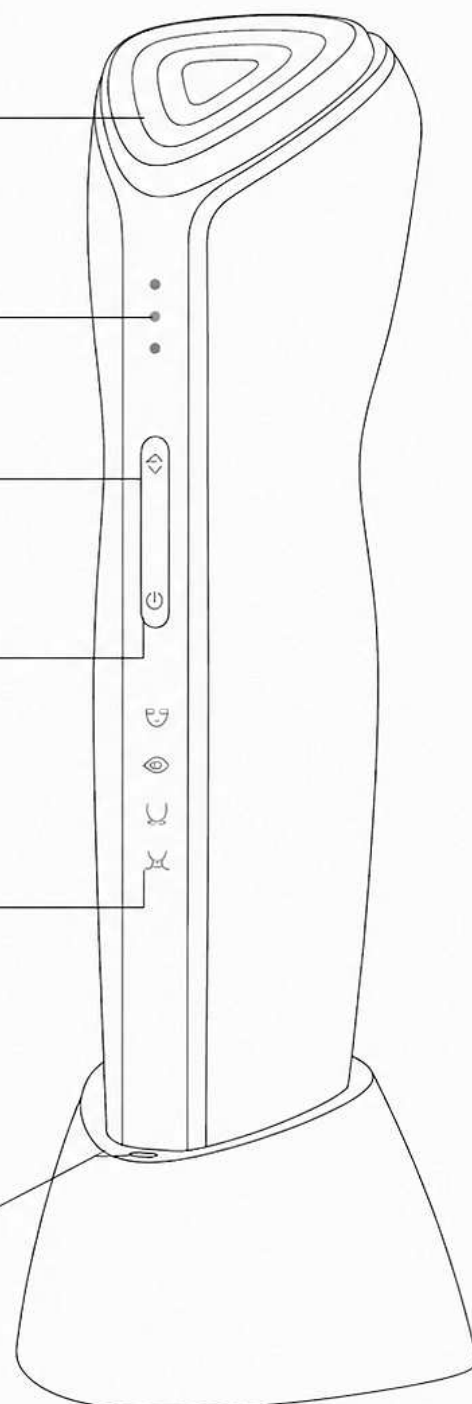

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

BeautyRelax RFlift nabízí čtyři specializované programy, které jsou optimalizovány pro různé oblasti obličeje a krku. Každý program využívá specifickou kombinaci radiofrekvenční technologie (RF), EMS elektrické stimulace svalů nebo LED fotonové terapie. Díky tomu je ošetření přizpůsobeno potřebám jednotlivých částí obličeje.

Full Face Mode

Komplexní ošetření celého obličeje.

Aktivní technologie

- infračervené LED světlo (940 nm)
- radiofrekvenční technologie (RF)

Účel programu

Program je určen pro celkové omlazení pokožky. Kombinace radiofrekvenční energie a infračerveného světla podporuje přirozené regenerační procesy pokožky, stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu a přispívá ke zlepšení pevnosti a pružnosti pleti. Je vhodný jako základní program pro pravidelnou péči o celý obličej.

Periocular Mode

Ošetření citlivé oblasti kolem očí.

Aktivní technologie

- žluté LED světlo (595 nm)
- radiofrekvenční technologie (RF)

Účel programu

Program je přizpůsoben jemné pokožce v okolí očí. Šetrná radiofrekvenční energie společně se žlutým LED světlem podporují regeneraci pokožky, zlepšují její vzhled a pomáhají rozjasnit oční okolí. Program je určen ke zmírnění vzhledu jemných linek a známek únavy.

V-Face Mode

Modelace kontur obličeje.

Aktivní technologie

- červené LED světlo (635 nm)
- EMS elektrická stimulace svalů

Účel programu

Program je zaměřen na oblast tváří, čelistní linie a brady. EMS impulzy stimulují obličejové svaly a podporují jejich tonus, zatímco červené LED světlo přispívá k regeneraci pokožky a zlepšení její elasticity. Program je určen pro podporu pevnějších kontur obličeje a liftingového efektu.

Neck Mode

Ošetření pokožky krku.

Aktivní technologie

- červené LED světlo (635 nm)
- radiofrekvenční technologie (RF)

Účel programu

Program je optimalizován pro jemnější pokožku krku. Kombinace radiofrekvenční energie a červeného LED světla podporuje přirozenou regeneraci pokožky, zlepšuje její pružnost a pomáhá redukovat vzhled jemných vrásek v oblasti krku.

Přehled programů

Program	Aktivní LED	RF	EMS	Určení
Full Face Mode	Infračervené 940 nm	✓	–	Celý obličej
Periocular Mode	Žluté 595 nm	✓	–	Okolí očí
V-Face Mode	Červené 635 nm	–	✓	Kontury obličeje
Neck Mode	Červené 635 nm	✓	–	Krk

Jak fungují jednotlivé programy?

Každý program aktivuje pouze ty technologie, které jsou pro danou oblast nejvhodnější. Přístroj automaticky nastavuje jejich kombinaci, takže uživatel nemusí jednotlivé funkce zapínat samostatně.

- **Full Face Mode** využívá radiofrekvenční energii společně s infračerveným LED světlem pro komplexní omlazení celého obličeje.
- **Periocular Mode** kombinuje šetrnou radiofrekvenci a žluté LED světlo, které jsou vhodné pro citlivou pokožku kolem očí.
- **V-Face Mode** propojuje EMS stimulaci obličejových svalů s červeným LED světlem a je zaměřen především na zpevnění kontur obličeje.
- **Neck Mode** využívá radiofrekvenční technologii a červené LED světlo pro podporu pružnosti a pevnosti pokožky krku.

Toto rozdělení funkcí odpovídá konstrukci přístroje a umožňuje cílené ošetření jednotlivých oblastí s využitím nejvhodnější kombinace technologií.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE KROK ZA KROKEM

BeautyRelax RFlift je navržen pro snadné a intuitivní ovládání. Přístroj nabízí čtyři přednastavené programy, které automaticky aktivují odpovídající kombinaci technologií. Uživatel vybírá pouze program a intenzitu ošetření.

Krok 1 – Příprava pokožky

Před každým ošetřením důkladně očistěte pokožku od make-upu, mastnoty a dalších nečistot.

Na ošetřovanou oblast naneste tenkou souvislou vrstvu vodivého gelu na vodní bázi.

Nepoužívejte přístroj na suchou pokožku.

Krok 2 – Zapnutí přístroje

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF přibližně 2 sekundy.

Po zapnutí se rozsvítí světelná indikace a přístroj přejde do pohotovostního režimu.

Krok 3 – Výběr programu

Krátkým stiskem tlačítka MODE postupně přepínáte mezi jednotlivými programy.

Full Face Mode

Komplexní ošetření celého obličeje.

Aktivní technologie:

- radiofrekvenční technologie (RF)
- infračervené LED světlo (940 nm)

Periocular Mode

Program určený pro citlivou oblast kolem očí.

Aktivní technologie:

- radiofrekvenční technologie (RF)
- žluté LED světlo (595 nm)

V-Face Mode

Program pro modelaci kontur obličeje.

Aktivní technologie:

- EMS elektrická stimulace svalů
- červené LED světlo (635 nm)

Neck Mode

Program určený pro pokožku krku.

Aktivní technologie:

- radiofrekvenční technologie (RF)
- červené LED světlo (635 nm)

Krok 4 – Nastavení intenzity

Po výběru programu nastavte intenzitu ošetření.

Přístroj nabízí tři úrovně intenzity.

- Úroveň 1 – nízká intenzita (doporučeno při prvním použití)
- Úroveň 2 – střední intenzita
- Úroveň 3 – vysoká intenzita

Začínajte vždy na nejnižší úrovni a intenzitu zvyšujte pouze tehdy, pokud je ošetření příjemné.

Krok 5 – Ošetření pokožky

Přiložte hlavici na pokožku tak, aby byla po celou dobu v kontaktu s vodivým gelem.

Přístrojem pohybujte pomalu a plynule podle masážních linií.

Nezastavujte hlavici na jednom místě déle než 2–3 sekundy.

Při ošetření se mohou objevit:

- příjemný pocit tepla při RF programech,
- jemné mravenčení při programu V-Face s EMS impulzy.

Tyto pocity jsou běžným projevem správné funkce přístroje.

Krok 6 – Doporučená doba ošetření

- Full Face Mode: 8–10 minut
- Periocular Mode: 3–5 minut
- V-Face Mode: 5–8 minut
- Neck Mode: 4–6 minut

Celková doba jednoho ošetření by neměla přesáhnout přibližně 20 minut.

Doporučená frekvence používání je 2–3× týdně.

Krok 7 – Ukončení ošetření

Po dokončení programu podržte tlačítko ON/OFF přibližně 2 sekundy.

Přístroj se vypne.

Z pokožky odstraňte zbytky vodivého gelu a ošetřete pleť běžným hydratačním sérem nebo krémem.

Krok 8 – Čištění přístroje

Po každém použití očistěte ošetřovací hlavici měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou nebo dezinfekčním prostředkem vhodným pro kosmetické přístroje.

Přístroj nikdy neponořujte do vody.

Po vyčištění jej uložte do nabíjecí základny nebo na suché místo.

Jedna důležitá poznámka

V dostupných materiálech je vidět, že přístroj má **dvě tlačítka** (Power a Mode) a **tři úrovně intenzity**, ale není zcela jasné, **kterým tlačítkem se intenzita mění**. U většiny OEM modelů stejné konstrukce funguje ovládání takto:

- **Power** – zapnutí/vypnutí přístroje.
- **Mode** – krátkým stiskem se přepínají programy, delším nebo opakovaným stiskem se mění úroveň intenzity.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhněte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

Radiofrekvence zahřívá hlubší vrstvy kůže, čímž stimuluje tvorbu kolagenu, ale krátkodobě může způsobit vazodilataci (rozšíření cév) a pocit tepla.

- zarudnutí (obvykle ustoupí do 1–24 hodin),
- pocit tepla nebo „horké pleti“,
- mírný otok,
- jemná citlivost.

1) Chladit, ale ne ledem přímo

- Použijte **chladivý gelový sáček** nebo **studený obklad** zabalený v látce
- Chladte přibližně 5 až 10 minut v intervalech
- Nepřikládejte led přímo na kůži – může to způsobit podráždění či poškození

2) Nanést zklidňující přípravky

Vhodné jsou:

- **aloe vera gel** (čistý, bez parfemace),
- **panthenol** (např. ve formě pěny nebo krému),
- **termální voda ve spreji**,
- produkty s **niacinamidem** (snižuje zarudnutí),
- lehké **hydratační krémy bez alkoholu a parfemace**.

Vyhněte se:

- aktivním látkám jako **retinol, AHA/BHA kyseliny, vitamín C**,
- parfémovaným nebo mastným krémům.

3) Vyhnout se teplu 24–48 hodin

To znamená:

- sauna
- solárium
- horké sprchy
- intenzivní sportování (zvýšení teploty a pocení prodlouží zarudnutí)
- přímé slunce

4) Neškrábat a nedráždit pokožku

- Nemačkejte, nedrhňte, nepoužívejte peelingy.
- Plet ponechejte v klidu.

5) Použít SPF


- Pokud jdete ven, naneste **SPF 30–50**, i když je zataženo.
- Plet je po radiofrekvenci citlivější na UV záření.
- Běžné reakce odezní během **několika hodin až jednoho dne**.
- Citlivé pleti to může být **až 48 hodin**.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Pro správnou funkci přístroje vždy používejte čirý vodivý gel na vodní bázi. Gel zajišťuje optimální přenos radiofrekvenční energie a EMS impulsů do pokožky a zároveň umožňuje plynulý pohyb aplikační hlavičky.
- Pokud ošetřujete větší oblast obličeje nebo krku, doporučujeme nanášet vodivý gel postupně po jednotlivých partiích. Gel může během ošetření postupně vysychat, což snižuje komfort i účinnost aplikace.
- Jednotlivé programy jsou výrobcem přednastavené. Přístroj automaticky aktivuje odpovídající kombinaci technologií podle zvoleného režimu. Není možné jednotlivé technologie zapínat nebo vypínat samostatně.
- Program Full Face Mode využívá kombinaci radiofrekvenční technologie a infračerveného LED světla pro komplexní péči o celý obličej.
- Program Periocular Mode využívá radiofrekvenční technologii a žluté LED světlo. Je optimalizován pro citlivou pokožku v okolí očí.
- Program V-Face Mode kombinuje EMS elektrickou stimulaci svalů a červené LED světlo. Je určen především pro zpevnění kontur obličeje a podporu tonusu obličejových svalů.
- Program Neck Mode využívá radiofrekvenční technologii a červené LED světlo pro podporu pružnosti a pevnosti pokožky krku.
- Během jednoho ošetření můžete jednotlivé programy libovolně kombinovat. Doporučujeme začít programem Full Face Mode a následně pokračovat specializovanými programy podle potřeb jednotlivých partií obličeje.
- Ošetřovací hlavičku udržujte po celou dobu v kontaktu s pokožkou a pohybujte s ní pomalu a plynule podle masážních linií. Nenechávejte hlavičku na jednom místě déle než 2–3 sekundy.
- Při prvním použití vždy zvolte nejnižší úroveň intenzity. Vyšší intenzitu nastavujte pouze tehdy, pokud je ošetření příjemné a pokožka na něj dobře reaguje.


- Při radiofrekvenčním ošetření můžete cítit příjemné teplo. Při programu V-Face Mode se mohou objevit jemné elektrické impulzy nebo lehké mravenčení. Tyto pocity jsou běžným projevem správné funkce přístroje.
- Pokud je ošetření nepříjemné i při nejnižší intenzitě, zvýšte množství vodivého gelu, zrychlete pohyb hlavičky po pokožce nebo ošetření přerušete.
- Ošetřovaná pokožka by měla být čistá, suchá a bez silnější vrstvy ochlupení. Zlepší se tím kontakt hlavičky s pokožkou i účinnost přenosu jednotlivých technologií.
- LED fotonová terapie využívá neinvazivní světelné záření a při běžném používání nevyžaduje ochranné brýle. Nedoporučuje se však dívat se z bezprostřední blízkosti přímo do svítících LED diod po delší dobu.
- Po ukončení ošetření odstraňte zbytky vodivého gelu a aplikujte hydratační sérum nebo pleťový krém. Ošetřená pokožka může kosmetické přípravky lépe vstřebávat.
- Po dobu několika hodin po ošetření doporučujeme vyhnout se sauně, horké koupeli, intenzivnímu slunění a dalším činnostem, které mohou pokožku zbytečně zatěžovat.
- Přístroj používejte pravidelně 2–3krát týdně. Pro dosažení viditelných výsledků je důležitější pravidelnost než vysoká intenzita nebo příliš časté používání.
- Po každém použití očistěte aplikační hlavičku měkkým hadříkem nebo vhodným dezinfekčním prostředkem. Přístroj nikdy neponořujte do vody a před uložením jej vždy důkladně osušte

MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ

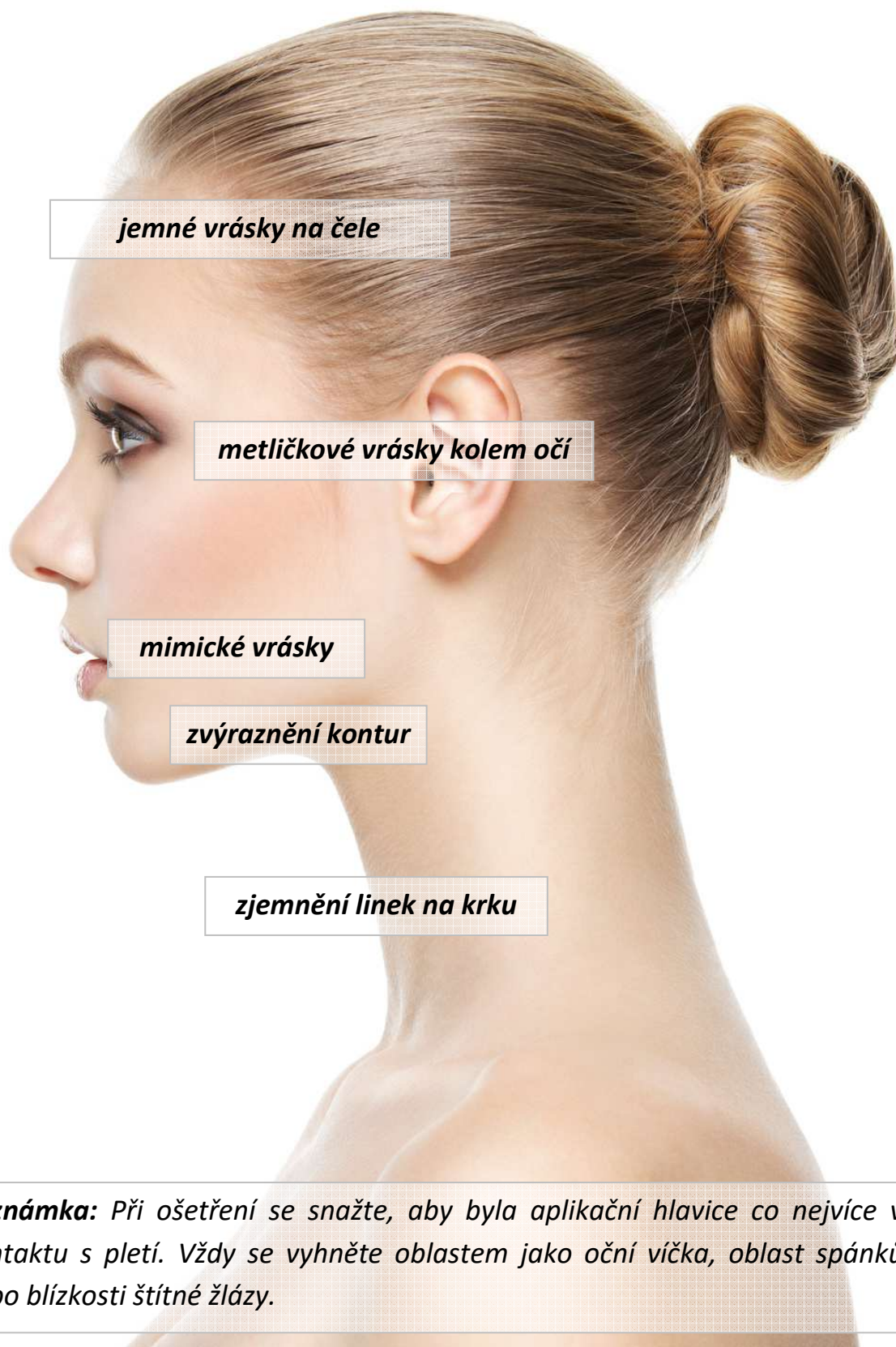

DOPORUČENÉ POHYBY PŘÍSTROJE

OBLAST TVÁŘE

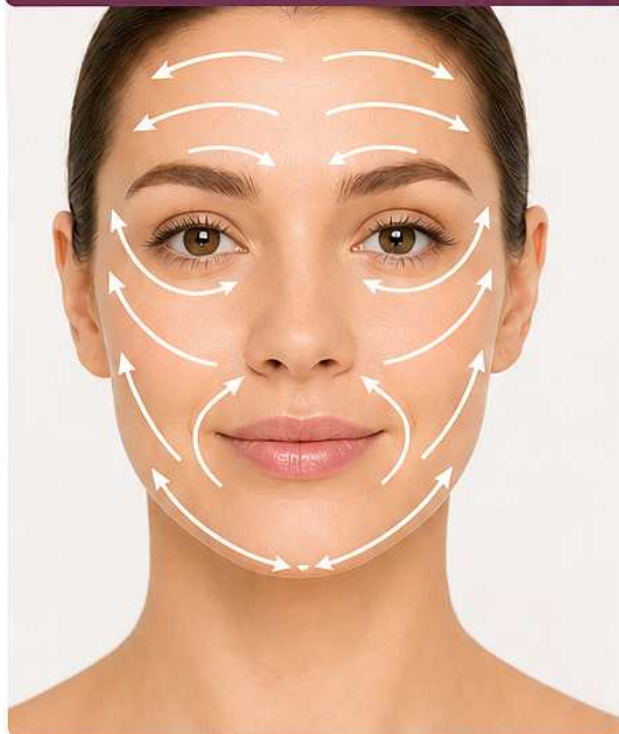

- 1 ČELO**
Od středu čela směrem do stran a vzhůru.
- 2 OČNÍ OKOLÍ**
Jemně od vnitřního koutku oka směrem ven a nahoru.
- 3 TVÁŘE**
Od nosu směrem do stran a vzhůru k spánkům.
- 4 OKOLÍ ÚST**
Od středu brady a rtů směrem do stran a vzhůru.
- 5 BRADA**
Od středu brady podél kontur čelisti směrem k uším.

OBLAST KRKU




- 1 PŘEDNÍ ČÁST KRKU**
Od spodní části krku směrem vzhůru k bradě.
Pohybujte přístrojem podél krku plynule a nikdy nezastavujte na jednom místě.
- 2 BOČNÍ ČÁST KRKU**
Od klíční kosti směrem vzhůru k linii čelisti a pod uši.

OBLAST DEKOLTU



- 1 STŘED DEKOLTU**
Od středu hrudní kosti směrem vzhůru k bradě.
- 2 STRANY DEKOLTU**
Od středu směrem do stran k ramenům a podél klíčních kostí.

MAPA CITLIVOSTI PLETI

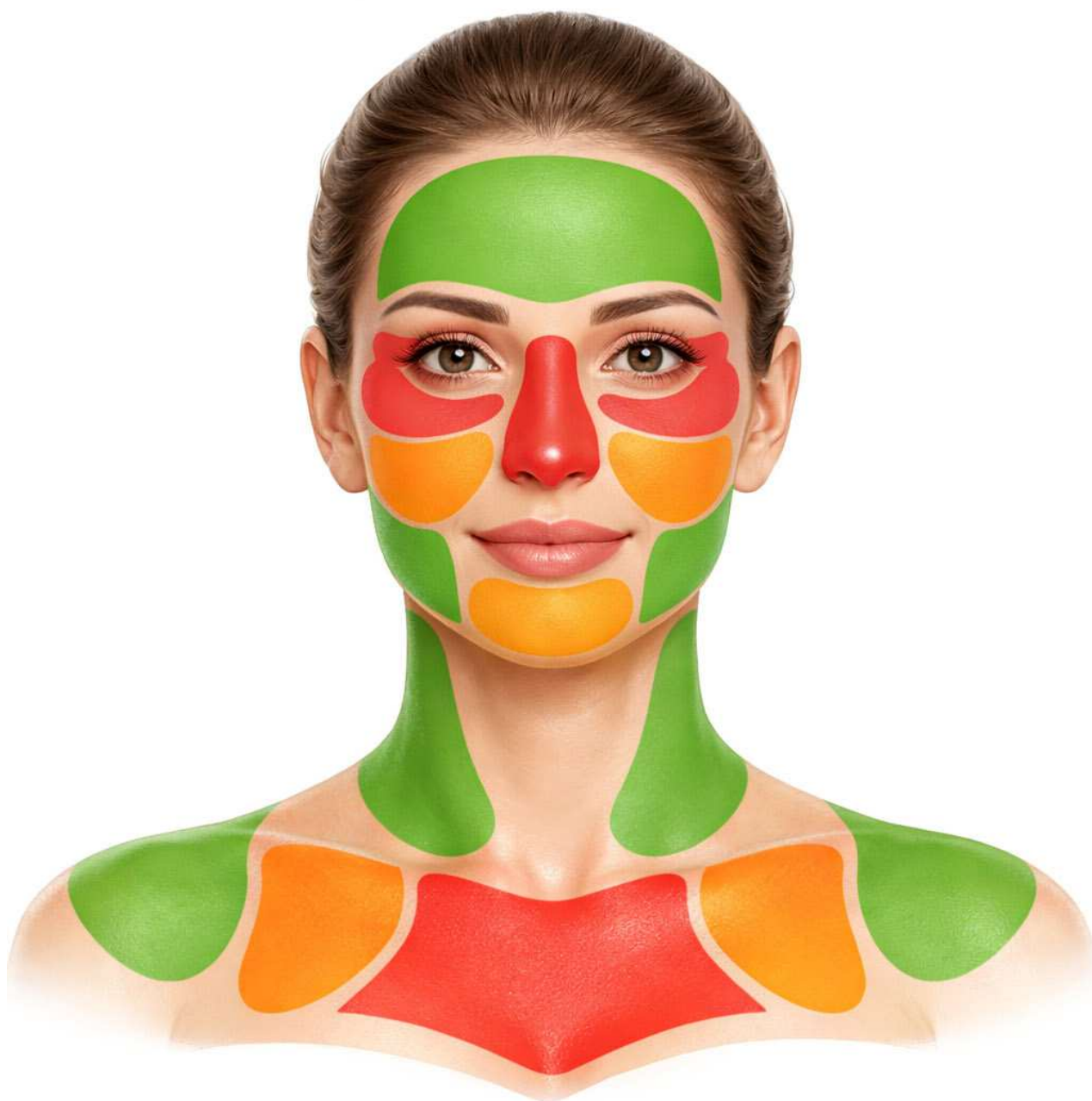

- NÍZKÁ CITLIVOST
- STŘEDNÍ CITLIVOST
- VYSOKÁ CITLIVOST

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Jak často mohu přístroj používat?

Doporučujeme používat přístroj 2–3krát týdně. Mezi jednotlivými ošetřeními ponechte pokožce alespoň 48 hodin na přirozenou regeneraci.

2. Kdy se dostaví první výsledky?

Jemnější a svěžejší vzhled pleti můžete zaznamenat již po několika použitích. Výraznější změny v pevnosti a pružnosti pokožky se obvykle dostavují při pravidelném používání během několika týdnů.

3. Musím používat vodivý gel?

Ano. Vodivý gel na vodní bázi je nezbytný pro správný přenos radiofrekvenční energie i EMS impulsů a zároveň umožňuje plynulý pohyb hlavice po pokožce.

4. Jaký gel je vhodný?

Používejte čirý vodivý gel na vodní bázi, například ultrazvukový kontaktní gel (Sonogel nebo obdobný výrobek bez parfemace a olejových složek).

5. Mohu použít běžný pleťový krém nebo olej?

Ne. Krémy ani oleje nemají dostatečnou elektrickou vodivost a mohou výrazně snížit účinnost radiofrekvenční technologie i EMS stimulace.

6. Je normální, že při ošetření cítím teplo?

Ano. Při programech využívajících radiofrekvenční technologii je mírné zahřátí pokožky běžným projevem správné funkce přístroje.

7. Je normální, že cítím jemné elektrické impulzy?

Ano. U programu V-Face Mode můžete cítit jemné mravenčení nebo pulzování. Jedná se o běžný projev EMS elektrické stimulace.

8. Mohu používat přístroj každý den?

Nedoporučuje se. Pokožka potřebuje čas na regeneraci. Příliš časté používání nezvyšuje účinnost ošetření.

9. Mohu během jednoho ošetření kombinovat více programů?

Ano. Programy můžete během jednoho ošetření postupně přepínat podle potřeb jednotlivých částí obličeje.

10. Mohu přístroj používat kolem očí?

Ano, ale pouze v programu Periocular Mode. Nikdy nepřikládejte hlavici přímo na oční víčka ani na oční bulvu.

11. Mohu přístroj používat na krk?

Ano. Pro tuto oblast je určen program Neck Mode, který využívá nastavení přizpůsobené jemnější pokožce krku.

12. Jak dlouho má trvat jedno ošetření?

Jedno ošetření obvykle trvá přibližně 10 až 20 minut podle počtu použitých programů a velikosti ošetřované oblasti.

13. Co mám udělat po ošetření?

Odstraňte zbytky vodivého gelu, pleť jemně osušte a aplikujte hydratační sérum nebo pleťový krém.

14. Mohu po ošetření na slunce?

Po ošetření doporučujeme několik hodin nevystavovat pokožku intenzivnímu slunečnímu záření a při pobytu venku používat ochranný krém s UV filtrem.

15. Jak mám přístroj čistit?

Po každém použití očistěte aplikační hlavici měkkým hadříkem nebo vhodným dezinfekčním prostředkem. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

16. Mohu přístroj používat během nabíjení?

Ne. Přístroj nepoužívejte během nabíjení.

17. Je LED světlo bezpečné pro oči?

Ano, při běžném používání není nutné používat ochranné brýle. Přesto se nedoporučuje dívat se z bezprostřední blízkosti přímo do svítících LED diod po delší dobu.

18. Co dělat, pokud je ošetření nepříjemné?

Snižte intenzitu, naneste větší množství vodivého gelu nebo přístrojem pohybujte rychleji. Pokud nepříjemné pocity přetrvávají, ošetření přerušte.

19. Mohou přístroj používat více členové domácnosti?

Ano. Z hygienických důvodů doporučujeme po každém použití důkladně očistit a dezinfikovat aplikační hlavici.

20. Je přístroj vhodný pro všechny typy pleti?

Přístroj je vhodný pro většinu typů pleti. Nepoužívejte jej na poraněnou, zanícenou nebo jinak poškozenou pokožku ani v případě kontraindikací uvedených v tomto návodu. Pokud si nejste jistí vhodností použití, poraďte se před ošetřením se svým lékařem.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj je vybaven vestavěným dobíjecím lithium-iontovým akumulátorem, který zajišťuje dlouhou provozní dobu a pohodlné bezdrátové používání. Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít, aby byl zajištěn její optimální výkon a maximální kapacita.

Postup nabíjení

1. Umístěte přístroj do nabíjecí základny nebo připojte nabíjecí kabel do nabíjecího konektoru přístroje.
2. Druhý konec kabelu připojte k síťovému adaptéru.
3. Po připojení ke zdroji napájení se rozsvítí indikátor nabíjení, který signalizuje průběh dobíjení baterie.
4. Jakmile je baterie plně nabita, indikátor nabíjení se změní na trvale svítící kontrolku nebo zhasne (v závislosti na konkrétním modelu přístroje).
5. Po dokončení nabíjení odpojte přístroj od napájení a uložte jej do nabíjecí základny nebo na suché místo.
6. Délka nabíjení závisí na stavu a kondici baterie.

Doporučení pro dlouhou životnost baterie

- Nabíjejte přístroj při pokojové teplotě (10–35 °C).
- Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel s adaptérem, které jsou součástí balení.
- Nenechávejte baterii dlouhodobě zcela vybitou.
- Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, nabijte baterii přibližně na 50–80 % a jednou za tři měsíce ji krátce dobijte.
- Po úplném nabití odpojte přístroj od nabíječky. Přestože moderní lithium-iontové baterie disponují ochranou proti přebíjení, odpojení po dokončení nabíjení přispívá k jejich dlouhodobé životnosti.

Dodržováním těchto doporučení zajistíte spolehlivý provoz přístroje, maximální výkon baterie a její dlouhou životnost.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Správná péče o přístroj je důležitou součástí jeho bezpečného používání a přispívá k zachování jeho optimálního výkonu, dlouhé životnosti a hygienického provozu. Pravidelné čištění ošetřovací hlavičky zabraňuje usazování zbytků kosmetických přípravků, kožního mazu a dalších nečistot, které by mohly ovlivnit účinnost ošetření.

Čištění po každém použití

1. Po ukončení ošetření přístroj vždy vypněte a odpojte od nabíjecí základny.
2. Ošetřovací hlavičku jemně otřete měkkým hadříkem nebo kosmetickým tamponem navlhčeným čistou vodou. V případě potřeby lze použít malé množství jemného neagresivního čisticího prostředku nebo dezinfekčního přípravku určeného pro kosmetické přístroje.
3. Poté hlavičku osušte čistým, měkkým hadříkem bez vláken.
4. Před uložením se ujistěte, že je přístroj zcela suchý.

Pravidelná údržba

- Pravidelně kontrolujte čistotu ošetřovací hlavičky i nabíjecích kontaktů.
- V případě znečištění nabíjecích kontaktů je očistěte suchým bavlněným tamponem.
- Přístroj skladujte na čistém, suchém místě mimo přímé sluneční záření, vysokou vlhkost a zdroje tepla.
- Pro zachování maximální životnosti akumulátoru doporučujeme přístroj pravidelně dobíjet a nenechávat jej dlouhodobě zcela vybitý.

Důležitá upozornění

- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- K čištění nepoužívejte abrazivní houbičky, drátěnky ani čisticí prostředky obsahující aceton, alkohol ve vysoké koncentraci, rozpouštědla nebo jiné agresivní chemikálie.
- Nečistěte přístroj pod tekoucí vodou, pokud není výrobcem výslovně uvedeno, že je voděodolný.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani opravovat svépomocí. V případě závady kontaktujte autorizovaný servis nebo svého prodejce.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučuje se jej uložit plně nabitý a přibližně jednou za tři měsíce akumulátor dobít.

Pravidelná údržba a šetrné zacházení zajistí spolehlivý provoz přístroje, zachování jeho maximální účinnosti i hygienických vlastností. Dobře udržovaný přístroj poskytuje konzistentní výsledky ošetření a přispívá k bezpečné a komfortní péči o pleť po mnoho let.

PÁR VĚT ZÁVĚREM

Tento kosmetický přístroj představuje vyspělý prostředek pro moderní domácí péči o pleť a svými funkcemi se přibližuje technologiím využívaným v profesionálních kosmetických studiích. Kombinace několika ošetřovacích režimů umožňuje komplexní péči zaměřenou na zlepšení kvality pokožky, podporu její přirozené regenerace a zvýšení účinnosti běžně používaných kosmetických přípravků. Díky ergonomickému designu, jednoduchému ovládání a možnosti nastavení intenzity je vhodný jak pro začínající uživatele, tak pro ty, kteří mají s kosmetickými technologiemi již zkušenosti.

Z odborného hlediska lze tento přístroj hodnotit jako velmi kvalitního pomocníka pro pravidelnou domácí péči. Při systematickém používání podporuje lepší mikrocirkulaci pokožky, přispívá ke zvýšení elasticity pleti, zlepšuje její hydrataci a napomáhá efektivnějšímu vstřebávání aktivních látek obsažených v kosmetických sérech a krémech. Výsledkem může být viditelně svěžejší, pevnější a sjednocenější vzhled pleti s redukcí známek únavy i prvních projevů stárnutí.

Velkou předností přístroje je možnost zařadit profesionálně inspirovanou péči do každodenní kosmetické rutiny bez nutnosti častých návštěv kosmetických salonů. Pravidelné ošetření přispívá k dlouhodobému udržení zdravého vzhledu pokožky a podporuje přirozenou tvorbu kolagenu a elastinu, které jsou klíčové pro pevnost a pružnost pleti. Při kombinaci s kvalitní kosmetikou lze dosáhnout výsledků, které jsou při dlouhodobém používání dobře patrné.

Pro dosažení maximálního efektu doporučujeme dodržovat doporučenou frekvenci používání a přizpůsobit jednotlivé režimy aktuálním potřebám pokožky. Právě pravidelnost je rozhodujícím faktorem pro dosažení dlouhodobých a viditelných výsledků.

Celkově lze tento přístroj hodnotit jako promyšlené, bezpečné a technologicky pokročilé zařízení, které nabízí vysokou užitnou hodnotu. Představuje výbornou investici pro každého, kdo chce aktivně pečovat o svou pleť, podpořit její přirozenou vitalitu a dopřát si kvalitní kosmetickou péči v pohodlí domova. Při správném používání se může stát nepostradatelnou součástí každodenní beauty rutiny a významně přispět k dlouhodobě mladistvému, zdravému a zářivému vzhledu pokožky.

Martin Hrbek

odborný konzultant a školitel pro značku BeautyRelax

shop.beautyrelax.cz | email: mh@santadria.cz | tel: (+420) 737 196 160 BeautyRelax

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz



737 196 160

mh@santadria.cz

shop.beautyrelax.cz

www.beautyrelax.cz

facebook.com/BeautyRelaxEquipment



Martin Hrbek
odborný konzultant

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

SANTADRIA s.r.o. Mojmírovo nám. 75/2 Brno 61200 Brno 61200 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj na vrásky RFLIFT

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1500**

EAN: **8594166116924**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN55014-2:2015

Přístroj slouží ke kosmetické péči o pleť. Přístroj není zdravotnický prostředek.

Technologie přístroje slouží pro neinvazivní aplikaci na pleť. Žádná z částí aplikační hlavičky není schopna narušit integritu pleti. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění.

V případě používání více osobami je třeba dbát zvýšenou pozornost s hygienickými normami pro přístroje obdobného typu.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.2.2023