

NÁVOD K OBSLUZE

Obličejová sauna **BeautyRelax BR-2826**

STEAMMAX PROFESSIONAL



OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
OBSAH BALENÍ	6
POPIS PŘÍSTROJE	8
POPIS OVLADAČE	9
POPIS DISPLEJE	10
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	11
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	13
CERTIFIKACE	13
DOVOZCE	13
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax SteamMax Professional je inovativní přístroj pro ošetření pleti pomocí atomizované páry. Molekuly páry mají menší velikost než je průměr kožních pórů. Maska poskytuje blahodárné účinky páry rovnoměrně pro celou plochu obličeje. Dochází k uvolnění obličejových svalů, ohřevu pleti a otevření kožních pórů. Následný proces čištění pleti a další metody pleťové péče jsou násobně efektivnější. Pleť je vláčná a hydratovaná. Možnost regulace teploty páry. Nastavení funkcí pomocí dálkového ovladače. 4 módy ošetření pleti. Rychlé předehřátí. Pára je generována již po uplynutí 1 minuty. Produkuje 9g páry za minutu. Maska se snadno přizpůsobí každému uživateli. Integrovaný zásobník na vodu.



UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtete tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
 - Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití poté konzultujte se svým praktickým lékařem.
 - Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
 - Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí.
 - Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
 - Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
 - Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, přístroj nepoužívejte a obraťte se na záruční servis.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.
 - Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
 - Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Akutní virové onemocnění
- Epilepsie
- Kardiostimulátor
- Klienti pod vlivem alkoholu nebo návykový látek
- Závažné kožní onemocnění na místě použití přístroje
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění
- Těhotenství
- Únavový syndrom



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

- Ošetření oblasti obličeje pomocí atomizované nano páry
- Uvolnění obličejových svalů
- Intenzivní hlubkový ohřev pleti
- Otevření kožních pórů
- Další fáze pleťového ošetření jsou násobně efektivnější
- Rovnoměrné pokrytí celé plochy obličeje.
- Okamžitá hydratace pleti
- Následné užití kosmetických přípravků má lepší vstřebatelnost (až 6x lepší vstřebatelnost)
- Možnost regulace teploty páry
- Snadné ovládání přístroje pomocí dálkového ovladače
- 4 přednastavené automatické programy
- Rychlé přehřátí páry – přístroj začne generovat páru již po uplynutí 1 minuty
- Produkuje až 9g páry za minutu
- Přizpůsobí se každému uživateli pomocí snadného zapínání
- Integrovaný zásobník na vodu přímo v masce
- Maximální bezpečnost použití
- Vaši pleť nemůže přístroj žádným způsobem popálit
- Páru budete na pleti vnímat jako příjemné teplo
- Příjemná relaxace zejména v zimních měsících

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Doporučená délka použití: 8 až 10 minut
- Rozměry: 28x21x14cm
- Hmotnost: 1,5kg

OBSAH BALENÍ

- Obličejová sauna BeautyRelax BR-2826 STEAMMAX PROFESSIONAL.
- Ovladač.
- Síťový adaptér 220V.
- Návod k obsluze.




POPIS PŘÍSTROJE

1. Zásobník na vodu
2. Otvor pro přívod vzduchu
3. Světelná indikace
4. Ovladač



POPIS OVLADAČE

1. Displej
2. Tlačítko **MODE A**
3. Tlačítko **MODE B**
4. Tlačítko **MODE C**
5. Tlačítko **MODE D**
6. Tlačítko **TEMP +** (zvýšení teploty)
7. Tlačítko **TEMP -** (snížení teploty)
8. Tlačítko **T+** (zvýšení času)
9. Tlačítko **T-** (snížení teploty)
10. Tlačítko **ON/OFF** (zapnutí/vypnutí)

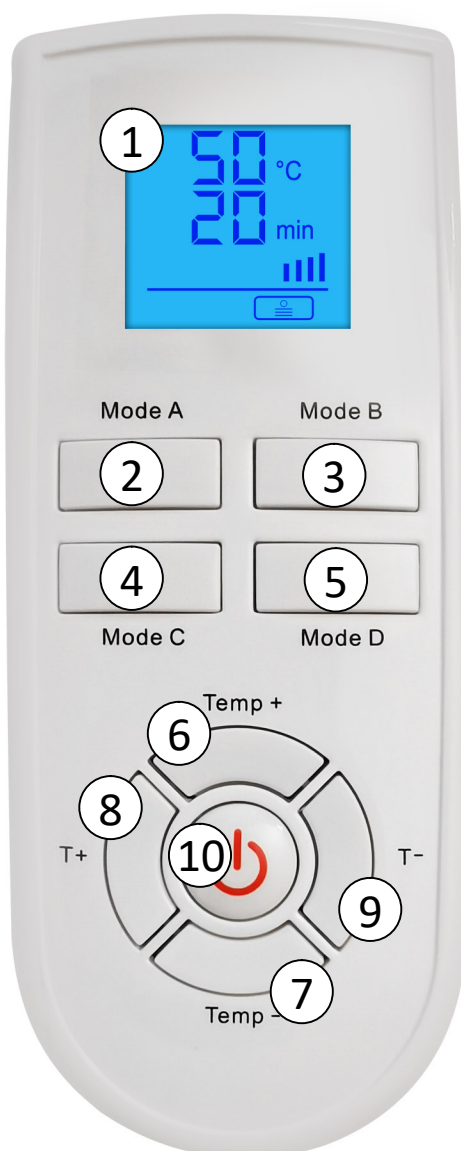

POPIS DISPLEJE

1. Teplota páry (stupně celsia)
2. Časovač (v minutách)
3. Indikace módu
4. Indikace přehřátí páry



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Připojte konektor napájecího adaptéru ke kabelu. Konektor připojte do zdířky a konektorem otočte. Kabel je tím zafixovaný, aby se nemohl v průběhu použití odpojit.



2. Odstraňte krytku nádržky v horní části přístroje.
3. Zásobník naplňte destilovanou vodou. Z dlouhodobého hlediska tím přispějete k dlouhé životnosti přístroje. Kohoutková voda může obsahovat částice vodního kamene, což není po technické stránce pro přístroj přípustné.
4. Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky. Vždy dbejte na to, aby se nenacházela na vašich rukou vlhkost.
5. Přístroj zapnete pomocí stisku tlačítka **ON/OFF**.
6. Pomocí tlačítek **TEMP+** a **TEMP-** si můžete nastavit teplotu páry. K dispozici jsou hodnoty **35°C**, **40°C**, **45°C**, **50°C**, **55°C** a **60°C**.
7. Pomocí tlačítek **T+** a **T-** si můžete nastavit čas použití přístroje. K dispozici jsou hodnoty od 1 do 60 minut.
8. Pomocí tlačítek **MODE A** - **B** - **C** - **D** si můžete nastavit program dávkování páry. K dispozici jsou intervaly po 5 sekundách (**MODE A**), 10 sekundách (**MODE B**), 20 sekundách (**MODE C**) a 30 sekundách (**MODE D**).
9. Průběh předehřátí je zobrazen pomocí ikony v pravém spodním rohu na displeji. Průběh předehřátí doprovází blikání ikony.
10. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Přístroj neutahujte k obličejí příliš pevně. Na druhou stranu by měla být maska v plném kontaktu s vaším obličejem.
- 2.** Pokud se s přístrojem teprve seznamujete, doporučujeme nastavit nižší hodnoty páry. Přidávejte postupně dle vašeho pocitu. Pára by měla působit na vašem obličejí příjemně. Neměla by vás na povrchu pleti pálit.
- 3.** Optimální načasování použití je v případě, kdy potřebujete s pletí dále pracovat (hloubkové čištění pleti, lifting pleti, apod.). Přístroj můžete také používat pravidelně pro aktivní uvolnění a relaxaci obličejí. Docílíte příjemného uvolnění obličejových svalů.
- 4.** Použití přístroje je blahodárné pro vaši pleť právě v zimním období, kdy pleť trpí často na dehydrataci. Stejně tak je velmi přínosné použití v letních měsících, kdy je naopak pleť vysušena od slunce.
- 5.** Při nižších hodnotách teploty páry pleť aktivně hydratujete. Při vyšších teplotách páry napomůžete otevření pórů. Vaše pleť je tak skvěle připravena na další pleťové ošetření.
- 6.** Doporučený čas použití je pouze orientační. Začínajte použití v kratších intervalech. Čas postupně prodlužujte dle vašeho pocitu.
- 7.** Pokud používáte přístroj v zimním období, po použití přístroje vyčkejte, než pleť vychladne. S ohřátou pletí byste neměli jít ihned při velmi nízkých teplotách, které se blíží mrazu.
- 8.** Pára v průběhu působení na pleti postupně kondenzuje. Proto je konstrukce přístroje navrženo tak, aby byla tato tekutina zachycena ve spodním okraji mezi obličejem a přístrojem. Přesto však doporučujeme mít v průběhu použití v ruce kosmetický kapesníček pro setření vody, která by ztékala z krku směrem dolů.
- 9.** Při manipulaci se síťovým adaptérem vždy dbejte na to, aby byl povrch vašich rukou suchý. V opačném případě hrozí zranění elektrickým proudem.
- 10.** Přístroj nemá průzory pro oči. Proto si nejprve na ovladači nastavte parametry použití a teprve poté přístroj aplikujte na obličej.
- 11.** Přístroj používejte výhradně s destilovanou nebo kojeneckou vodou. Pomůžete tím z dlouhodobého hlediska udržet životnost a správnou funkčnost přístroje.
- 12.** Do zásobníku nepřidávejte žádné další látky, barviva či aormata. Mohlo by dojít k vážnému a trvalému poškození přístroje.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení použití byla plocha přístroje, která je v kontaktu s vaším obličejem očištěna. Platí to především v případech, pokud přístroj používá více osob, aby byly dodrženy zásady hygieny. Ideální je v tomto případě provést dezinfekci povrchu kontaktní plochy. Optimálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Po použití přístroj důkladně osušte pomocí měkkého hadříku.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Obličejová sauna

BeautyRelax STEAMMAX PROFESSIONAL

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2826**

EAN: **8594166120433**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**
je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55014-2:2015 EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010
EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014/AC:2015, EN 61000-4-11:2004+A1:2017

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 10.9.2022