

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-2650

THERMAGE EGG



OBSAH:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
KONTRAINDIKACE	6
POUŽITÍ SONOGELU	6
HLAVNÍ VÝHODY	7
ÚČEL POUŽITÍ	8
RADIOFREKVENCE	9
EMS	9
VIBRACE	9
FOTONOVÉ SVĚTLO	9
TECHNICKÉ PARAMETRY	10
POPIS PŘÍSTROJE	11
POPIS APLIKAČNÍ HLAVICE	12
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	13
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	15
MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ	17
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	18
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	19
NABÍJENÍ BATERIE	21
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	21
OBSAH BALENÍ	21
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	22
CERTIFIKACE	22
DOVOZCE	22

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- BeautyRelax THERMAGE EGG je přístroj z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod horní vrstvu pokožky. Přístroj není zdravotnický prostředek.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- BeautyRelax THERMAGE EGG je certifikován a splňuje všechny evropské normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Ošetření je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Radiofrekvenční vlny získají lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken.
- **Při ošetření vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu několika sekund (tzv. razítkování). Technologie podle typu ošetření pleti působí vždy, když aplikátor přístroje přiložíte k pleti. Začínáte na nejnižší nastavené hodnotě. Postupně můžete přejít i na vyšší úroveň. Ošetření pleti by nikdy nemělo být nesnesitelně bolestivé. Podle toho se snažte přizpůsobit délku kontaktu aplikátoru s pletí. Akceptovatelné je pouze jemné mravenčení až lehké štípnutí.**
- Pokud budete aplikační hlavici držet na pleti příliš dlouho a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření, přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností.
- Počet opakování ošetření je velice individuální. Záleží na věku a stavu pokožky. Ideální je jednou, maximálně dvakrát do týdne. Pleť a zejména oblast dermis potřebuje čas pro autonomní proces regenerace. Rozhodně neplatí pravidlo - čím častější používání, tím lepší dosažitelné výsledky. Stejně tak neplatí, čím větší výkon, tím rychlejší a lepší výsledek. Pleť každého z nás je orgán s individuálním stupněm citlivosti. Pro někoho může být střední hodnota výkonu již výrazně bolestivá, někdo nemá problém při delším ošetření snést nejvyšší výkon.
- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte aplikační hlavici. Ideální je použití čirého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavice.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: mh@santadria.cz
- Přejeme vám hodně úspěchů ve vašem úsilí ke zdravější a krásnější pleti.
Tým BeautyRelax.cz



UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenesí distributor odpovědnost.



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

KONTRAIKADIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (platí v místech použití přístroje)
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy




POUŽITÍ SONOGELU

Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého. Aplikáční gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Radiofrekvenční vlny a EMS pulzy se tak mohou na pleť lépe navázat.




HLAVNÍ VÝHODY

- Technologie: radiofrekvence, EMS pulzy, červené světlo, vibrace
- Zvyšuje pružnost pleti
- Velmi snadno dosažitelný liftingový efekt
- Podpora tvorby kolagenu
- Posílení obličejových svalů
- Vhodný pro všechny typy pleti
- Zabudovaná nabíjecí baterie

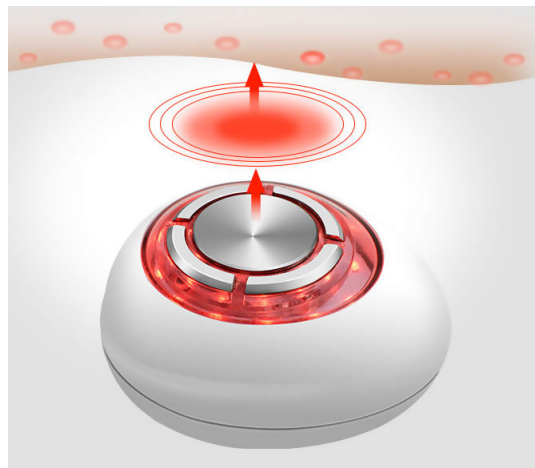

ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Thermage Egg je kosmetický přístroj pro neinvazivní omlazení pleti. Profesionální přístroj pro vysoce účinné pleťové ošetření. Radiofrekvence, EMS pulzy a fotonová terapie. Přímé zacílení pro stimulaci kolagenních a elastických vláken. Zvýšení pružnosti pleti. Praktická nabíjecí stanice. Multifunkční aplikační hlavice.

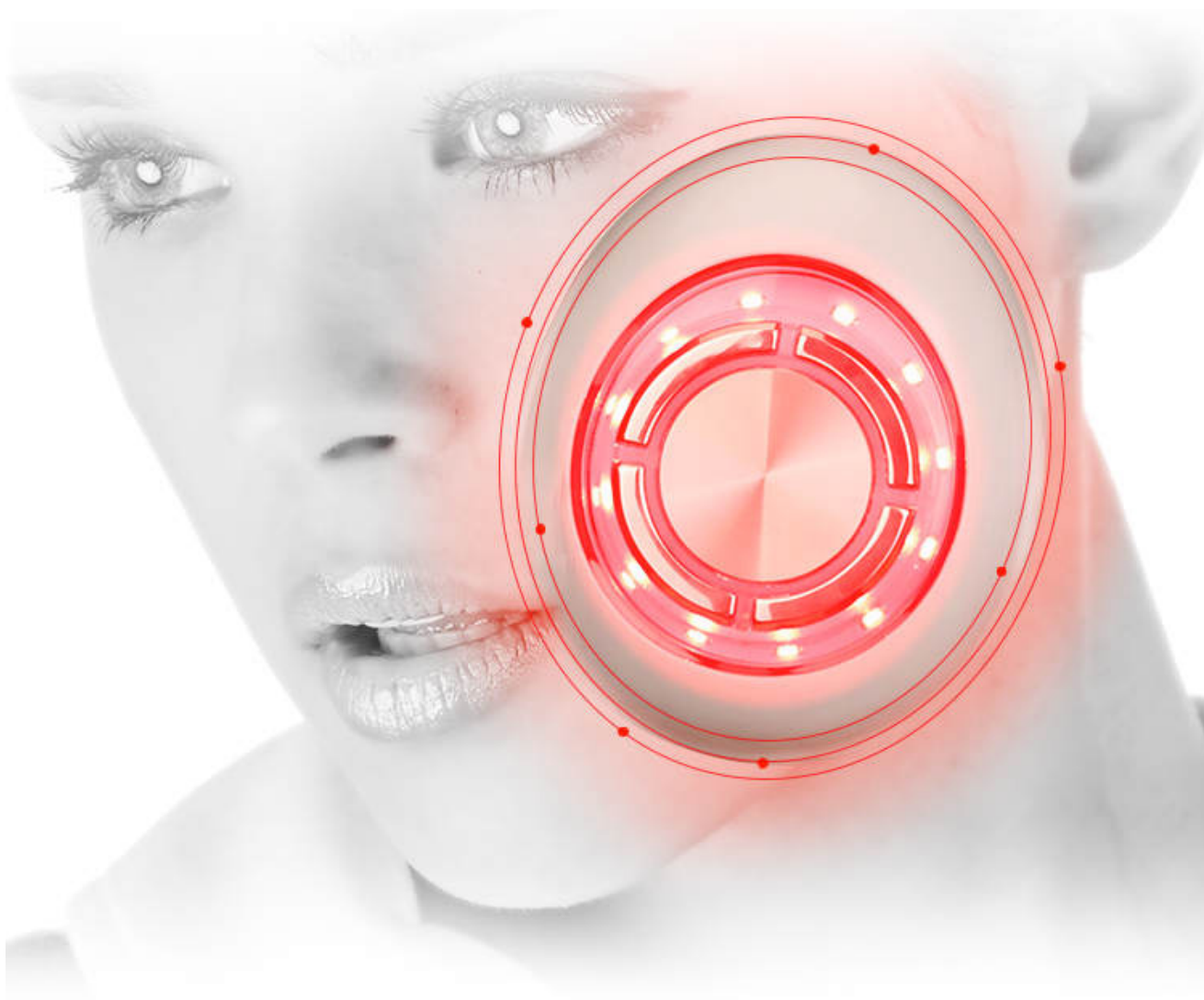

RADIOFREKVENCE

Aplikační hlavice generuje energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.




EMS

Kontaktní plochy aplikační hlavice generují EMS pulzy. Elektrické pulzy cílí přímo na strukturu svalových vláken. Stejným způsobem fungují klasické elektrostimulátory, které prostřednictvím gelových nalepovacích elektrod stimulují svaly na vybraných částech těla. Elektrické pulzy kosmetického přístroje pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. Zvýrazníte kontury obličeje.



VIBRACE

Správná funkce lymfatického systému platí nejen pro tělesné končetiny, ale také pro náš obličej. Pokud máme lymfu a krevní oběh v pořádku, odvod nečistot z krve probíhá násobně lepším způsobem. Zlepšení krevního oběhu = stimulace lymfatického systému = lepší odvod nečistot a škodlivin z těla = krásná a zdravá pleť. Jednoduchá rovnice, která platí nejen pro obličej, ale pro celé naše tělo. Jemná vibrační masáž patří z technologického hlediska mezi nejjednodušší, ale zároveň velmi účinnou techniku ošetření pleti.

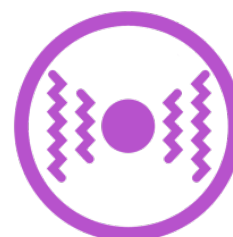

FOTONOVÉ SVĚTLO

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni. Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2650 THERMAGE EGG nabízí funkci červeného světla s vlnovou délkou 620nm.




Reálný pozitivní přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Radiofrekvence: 1MHz.
- Počet LED diod: 6.
- Ochrana proti vodě: IPX4 standard.
- Nabíjecí napětí: DC 5V 1000mA.
- Délka nabíjení: 4 hodiny.
- Provozní doba: 1 hodina.
- Baterie: Li-ion.
- Kapacita baterie: 800mAh.
- Provozní napětí: DC 7,4V.
- Výkon: 5W.
- Rozměry: 9×7,6×5,2cm.
- Hmotnost: 520g.

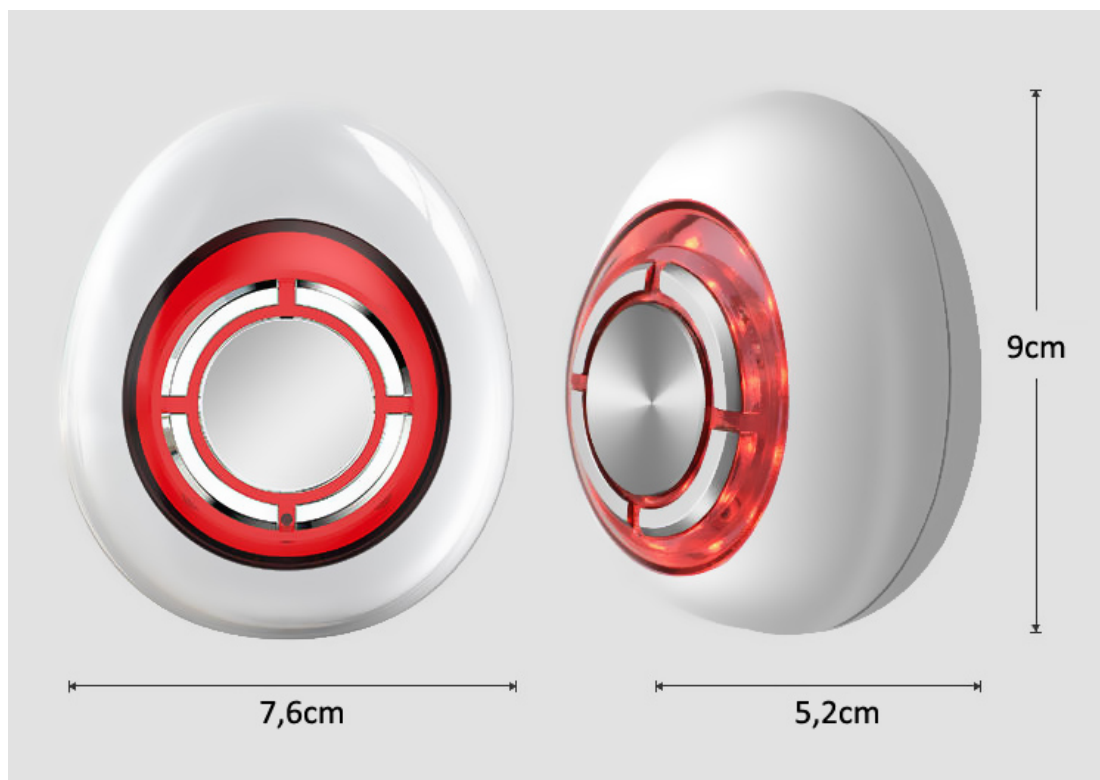

POPIS PŘÍSTROJE



1. Indikace **RF** - radiofrekvence
2. Indikace **EMS** - EMS mikropulzy
3. Indikace **VIB** - vibrace
4. Tlačítko **MODE**
5. Indikace **CHARGE** - nabíjení baterie
6. Tlačítko **INTENZITA**
7. Tlačítko **ON/OFF**
8. Nabíjecí stojánek

POPIS APLIKAČNÍ HLAVICE



1. Kontaktní plocha pro přenos radiofrekvenčních vln
2. Kontaktní plocha pro přenos EMS pulzů
3. Integrované světlo fotonové terapie

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Před každým použitím je třeba důkladně omýt pokožku. Ideální je načasovat si ošetření po koupeli. Na pleti by se neměl nacházet makeup, nečistoty ani jakékoliv kosmetické přípravky. Pleť by měla být dokonale suchá.
- 2.** Na ošetřovanou partii naneste jemnou vrstvu čirého kontaktního gelu. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikační hlavicí a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavicí. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Příklad bez pojivé látky mezi pletí a aplikátorem používat nedoporučujeme.
- 3.** Stiskněte krátce tlačítko **ON/OFF**. Příklad se zapne. Automaticky se spustí režim působení radiofrekvence. Světelná indikace **RF** bliká. Červené světlo fotonové terapie je aktivní. Radiofrekvence působí na nejnižší úrovni intenzity.
- 4.** Pomocí tlačítka **INENSITY** si můžete nastavit úroveň výkonu radiofrekvence. K dispozici jsem celkem tři úrovně: nízká, střední, vysoká. Každou úroveň signalizuje blikající světelný indikátor **RF** (pomalé blikání – nízká úroveň, rychlé blikání – střední úroveň, intenzivní blikání – nejvyšší úroveň).
- 5.** Stiskněte krátce tlačítko **MODE**. Aktivujete režim působení EMS pulzů. Světelná indikace EMS bliká. Červené světlo fotonové terapie je aktivní. EMS pulzy působí na nejnižší úrovni intenzity.
- 6.** Pomocí tlačítka **INENSITY** si můžete nastavit úroveň výkonu EMS pulzů. K dispozici jsem celkem tři úrovně: nízká, střední, vysoká. Každou úroveň signalizuje blikající světelný indikátor EMS (pomalé blikání – nízká úroveň, rychlé blikání – střední úroveň, intenzivní blikání – nejvyšší úroveň).
- 7.** Stiskněte krátce tlačítko **MODE**. Aktivujete režim působení vibrací. Světelná indikace **VIB** bliká. Červené světlo fotonové terapie je aktivní. Vibrace pracují vždy pouze v jedné úrovni intenzity výkonu. Červené světlo fotonové terapie je aktivní.
- 8.** Stiskněte krátce tlačítko **MODE**. Aktivujete režim působení radiofrekvence a vibrací. Pomocí tlačítka **INENSITY** si můžete nastavit výkon působení intenzity radiofrekvence (nízká, střední, vysoká). Nastavenou intenzitu působení radiofrekvenčních vln doprovází rychlost blikání světelného indikátoru **RF**. Červené světlo fotonové terapie je aktivní.


- 9.** Stiskněte krátce tlačítko **MODE**. Aktivujete režim působení EMS a vibrací. Pomocí tlačítka **INTENSITY** si můžete nastavit výkon působení intenzity EMS pulzů (nízká, střední, vysoká). Nastavenou intenzitu působení EMS pulzů doprovází rychlost blikání světelného indikátoru EMS. Červené světlo fotonové terapie je aktivní.
- 10.** Stiskněte krátce tlačítko **MODE**. Aktivujete režim působení radiofrekvenčních vln, EMS a vibrací. Pomocí tlačítka **INTENSITY** si můžete nastavit výkon působení intenzity radiofrekvence a EMS pulzů (nízká, střední, vysoká). Nastavenou intenzitu působení radiofrekvence a EMS pulzů doprovází rychlost blikání světelného indikátorů **RF** a **EMS**. Výkon působení radiofrekvence a EMS pulzů lze vždy nastavit současně. Červené světlo fotonové terapie je aktivní.
- 11.** Dalším stiskem tlačítka **MODE** se vrátíte zpět k bodu č. 3.
- 12.** Stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.
- 13.** Návod jak se pohybovat aplikátorem po pleti naleznete v pasáži tohoto návodu:
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU.
- 14.** Návod jak správně nabít baterii přístroje naleznete v pasáži tohoto návodu:
NABÍJENÍ BATERIE.
- 15.** Návod jak správně pečovat o aplikátor naleznete v pasáži tohoto návodu:
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Pokud se rozhodnete pro ošetření přístrojem větší části obličeje, krku nebo dekoltu, doporučujeme nanášet sonogel po částech. Přestože má kontaktní gel skvělé hydratační schopnosti, může po nějakém čase postupně vysychat.
2. Intenzitu výkonu si můžete nastavit pouze pro radiofrekvenci a EMS pulzy. K dispozici jsou celkem tři úrovně – nízká, střední, vysoká. Intenzitu působení vibrací měnit nelze.
3. Při pohybu aplikační hlavice se snažte mít celou plochu v plném kontaktu s pleť. Pokud se vám to nepodaří, nic se neděje. Pleť ošetřete pouze těmi kontaktními plochami, které vám tvar obličeje umožní.
4. Při aktivní funkci červeného fotonového světla není třeba používat žádné ochranné brýle. Žádný problém nepředstavuje ani ošetření pleti v očním okolí. Přesto bychom vám doporučili, abyste se vyhnuli přímému a dlouhému pohledu do zdroje světla. Váš zrak nebude žádným způsobem trvale poškozen, ale sledování zdroje světla po delší dobu není pro vaše oči příjemné.
5. Během jednoho ošetření pleti můžete jednotlivé programy (RF, EMS, VIB) postupně kombinovat. Používejte více ty programy, které odpovídají vašim cílům, které chcete prostřednictvím přístroje dosáhnout. Vycházejte z popisu významu jednotlivých technologií v úvodu návodu k obsluze. Doporučujeme zaměřit se na nejvíce problematické oblasti (jemné vrásky na čele, metličkové vrásky kolem očí, mimické vrásky, zvýraznění kontur, zjemnění linek na krku, atd.)
6. Pokud je vám působení některé technologie na konkrétním místě na pleti nepříjemné i při nejnižší úrovni intenzity, snižte množství sonogelu, zkratěte čas kontaktu aplikační hlavice s pleť nebo se tomuto místu úplně vyhněte.
7. **Upozornění:** Při prvním kontaktu s pleť mějte vždy zapnutou nejnižší úroveň intenzity. Aplikátor přiložte na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již ošetření nepříjemné až mírně bolestivé, nastavte zpět nejnižší úroveň nebo ošetření ukončete.
8. **Tip:** Ošetřená partie by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Radiofrekvence a EMS pulzy budou mít lepší možnost proniknout do podkožní tkáně.

9. **Doporučení:** Ošetřenou pleť nevystavujte v délce minimálně 3 dnů příliš horké vodě. Pokuste se vyhnout návštěvě sauny. Pokožka prochází po ošetření stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.
10. Ošetřete postupně vybranou část obličeje. Při ošetření vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu 1 až 2 sekundy (tzv. razítkováním). Začínajte na nejnižší nastavené hodnotě intenzity. Hlavním smyslem použití přístroje v režimu radiofrekvence je ohřívání vrstvy dermis pomocí radiofrekvenčních vln. Aplikační hlavici tedy držte v kontaktu s pletí tak dlouho, dokud je vám působení tepla na pleti příjemné. Pokud teplo rychleji graduje, zkráťte délku kontaktu aplikační hlavice s pletí nebo snižte úroveň intenzity působení radiofrekvence.
11. Intenzitu můžete postupně zvýšit podle pocitu. Ošetření pleti by nikdy nemělo být nesnesitelně bolestivé. Podle toho se snažte přizpůsobit délku kontaktu aplikátoru s pletí. Akceptovatelné pocity jsou pouze jemné mravenčení až lehké štípnutí.
12. Při vyšším výkonu může povrch aplikační hlavice dosahovat vyšších teplot, než při nižším výkonu. Pokud během používání přístroje dosáhne teplota aplikační hlavice vysoké teploty, přístroj vypněte a aplikační hlavici nechte vychladnout. V ošetření pleti pokračujte dále později. Zahřátí hlavice není závada. Jedná se o průvodní jev působení radiofrekvence.
13. Během jednoho ošetření pleti můžete jednotlivé úrovně intenzity radiofrekvence střídat.
14. Snažte se zaměřit na nejvíce problematické oblasti (jemné vrásky na čele, metličkové vrásky kolem očí, mimické vrásky, zvýraznění kontur, zjemnění linek na krku, atd.). Na místech, kde se nachází tenká citlivá pokožka, použijte nižší výkon. Na oblasti s vyšší tukovou vrstvou použijte vyšší výkon.
15. Po skončení používání přístroje pleť otřete od sonogelu. Použijte popřípadě krém nebo sprej pro hydrataci pleti. Během spánku bude vaše pleť regenerovat. Hydratace významně přispěje k rychlejšímu průběhu rekonvalescence pleti.

MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ

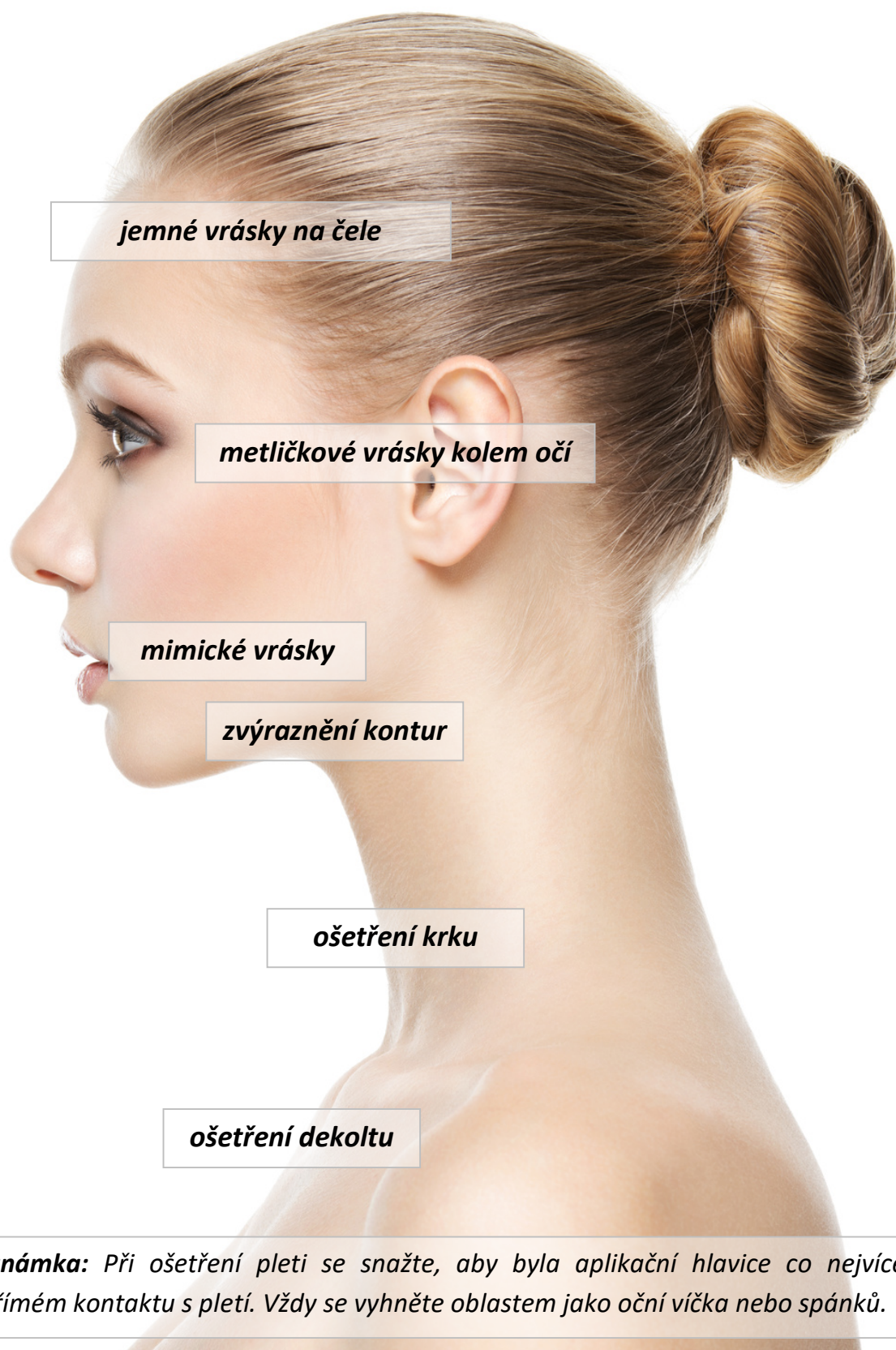

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

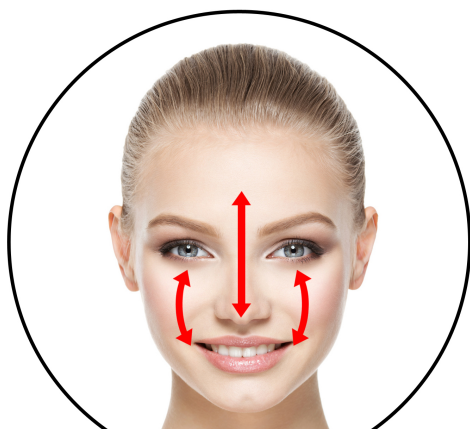

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.



Jaké pocity je možné během ošetření vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pletí proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis proud radiofrekvenčních vln. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přímé zacílení na vrstvu dermis o specifické frekvenci a výkonu. Působení EMS pulzů je možné vnímat jako pocit mravenčení.

Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavice?

Po skončení ošetření mohou na aplikační hlavici ulpět mikroskopické částičky kůže. Očištěním zabráníte jednak jejich případnému vniknutí do přístroje a zajistíte především hygienu provozu. Zvýšená hygiena provozu platí především v případě, pokud přístroj používá více osob.

Jaké výsledky mohou očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleť promítne?

Následné projevy na pleti po ošetření radiofrekvencí jsou velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. Obecně lze říci, že bezprostředně po ošetření je pleť mírně zarudlá. Penetrací vlhkosti sonogelu může působit vizuálně svěžím dojmem. Na pleti, kde došlo ke stimulaci pomocí aplikační hlavice, dochází k okamžitému lokálnímu zvýšení teploty. Přesto je však třeba dát pleti prostor v řádu hodin, kdy dojde k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za míru pružnosti pleti. Neinvazivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces. Je třeba plet průběžně takto stimulovat (v průměru 2x až 4x do měsíce). Při ukončení pravidelného ošetření pleti se pleť opět postupně vrací do původního stavu. Minimální rozestup mezi ošetřením stejné partie doporučujeme minimálně týden.

Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?

Doporučená délka individuálního ošetření je v rozsahu od 10 do 15 minut. Čas by neměl celkově přesáhnout 20 minut. Mluvíme zde o čistém času kontaktu aplikátoru s pletí.

Jaké přípravky je vhodné aplikovat bezprostředně po ošetření pleti radiofrekvencí?

Pleť je třeba po přístrojovém ošetření dostatečně hydratovat. Doporučujeme použít běžný hydratační krém, aby měla pleť dostatečnou vláhu pro její regeneraci. Určitě bychom se minimálně v den přístrojového ošetření vyhnuly dalším případným kosmetickým procedurám, jako např. hloubkové čištění pleti diamantovou mikrodermabrazí. Po ošetření radiofrekvencí je pleť mírně podrážděna s možnými příznaky zarudnutí. Je třeba dát pleti určitý čas pro její regeneraci. V den ošetření přístrojem bychom nedoporučovali návštěvu sauny.

Může aplikační hlavice povrch pleti poranit?

Rozhodně ano. Rozsah výkonu přístroje je záměrně upraven tak, aby byl schopen ošetřit celé spektrum uživatelů s různou citlivostí pleti a různou vrstvou tukové tkáně. Jedna z hlavních výhod

přístroje je flexibilita použití se zaměřením na obličej, krk a dekolt. Úprava dávkování výkonu umožňuje ošetření i velmi citlivých partií. Vyšší výkon naopak pro větší plochy, kde je míra citlivosti menší. Pokud by přístroj nenabízel dostatečný rozsah výkonu, nebylo by možné ho považovat v oblasti estetických přístrojů za efektivní univerzální nástroj pro lifting pleti. Proto je třeba při nastavení výkonu postupovat s maximální opatrností.

Jaké kosmetické přípravky kombinovat během ošetření přístrojem BeautyRelax THERMAGE EGG?

Před a v průběhu použití přístrojem nepoužívejte žádné kosmetické přípravky (vyjma klasického kontaktního gelu). Přidané látky v kosmetických přípravcích by mohly v kombinaci s technologiemi přístroje vyvolat nežádoucí alergickou reakci. Přístroj **BeautyRelax THERMAGE EGG** nabízí dostatečně výkonné technologie a tento účinek není třeba podpořit žádným dalším kosmetickým přípravkem. Pouze po použití je vhodné pleť každý den dostatečně hydratovat.

Jaké části těla lze přístrojem ošetřit?

Přístroj je určen pro ošetření oblasti obličeje, krku a popřípadě dekoltu.

V průběhu ošetření se výrazně zvýší teplota aplikační hlavice. Jak mám v tomto případě postupovat?

Pokud se nadále rozhodnete v ošetření pleti pokračovat, vypněte přístroj a ponechte ho alespoň 5 minut vychladnout. Poté opět pokračujte v používání přístroje.

Existují nějaké kontraindikace? (situace, kdy nelze přístroj používat)

Přístroj **BeautyRelax THERMAGE EGG** je určen pro všechny typy pleti bez věkového omezení uživatele. Přístroj není vhodné používat, pokud trpí uživatel vážným kožním onemocněním. Viz. seznam kontraindikací v úvodu návodu.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních přístrojů. Přístroj neléčí žádné kožní onemocnění. Přístroj nabízí ověřenou technologii radiofrekvence, EMS pulzů, fotonového světla a vibrací. Tato kombinace efektivně přispívá ke zlepšení kondice unavené a nezdravě vyhlížející pleti.

Jak postupovat, když baterie ztratí po delší době kapacitu?

Pokud se postupem času kapacita baterie výrazně sníží, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz Zašleme informace, jakým způsobem lze výměnu baterie řešit.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu.

Je přístroj vodotěsný?

Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod proudem tekoucí vody.

Může přístroj používat více osob?

Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce aplikační hlavice, druhá osoba přístroj použít může.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii s kapacitou 800mAh.

Upozornění: Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Jeden konec USB kabelu připojte do nabíjecího stojánu.
3. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
4. Průběh nabíjení signalizuje červená světelná signalizace CHARGE.
5. Jakmile je proces nabíjení dokončen, rozsvítí se zelená světelná signalizace CHARGE.
6. Čas nabíjení se může lišit v závislosti na stavu baterie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu kontaktní plochy hlavice.

OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BR-2650 THERMAGE EGG
- Nabíjecí stojánek
- USB kabel
- Hadřík
- Návod k obsluze

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.