

NÁVOD K OBSLUZE

Ultrazvukový kosmetický přístroj
s fotonovou terapií **Beautyrelax BR-1050**



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ BENEFITY PŘÍSTROJE	5
TECHNOLOGIE OŠETŘENÍ PLETI	5
OBSAH BALENÍ	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	6
ZÁSADNÍ ÚČINKY ULTRAZVUKU	6
POUŽITÍ SONOGELU	7
FOTONOVÁ TERAPIE	7
MODRÉ SVĚTLO 465NM	7
ZELENÉ SVĚTLO 525NM	7
ČERVENÉ SVĚTLO 625NM	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	9
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE	10
TECHNICKÉ PARAMETRY	11
NABÍJENÍ BATERIE	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	12
CERTIFIKACE	12
DOVOZCE	12

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy



Hlavní benefity přístroje

- Technologie ultrazvukových vln o frekvenci 3MHz.
- Tři světelné režimy fotonové terapie: červená, modrá a zelená.
- Aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli.
- Používání je naprosto bezpečné a bezbolestné.
- Šetrný k pokožce.
- Vhodný pro všechny typy pleti.
- Snadné ovládání pomocí tlačítek na těle přístroje.
- Kompaktní, malý a lehký.
- Bezdrátové používání.

TECHNOLOGIE OŠETŘENÍ PLETI

1. Ultrazvuk.
2. Fotonové světlo.

OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj Beautyrelax BR-1050.
- Stojánek.
- Ochranné brýle.
- Nabíjecí adaptér 220V.
- Návod k obsluze.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Ultrazvukový přístroj s fotonovou terapií BR-1050 je neinvazivní kosmetické zařízení, které kombinuje dvě metody ošetření pleti: ultrazvukovými vlnami a fotonovou terapií. Ultrazvuk o frekvenci 3MHz omlazuje pleť a režim fotonové terapie působí podle toho, jakou vlnovou délku si nastavíte. Pečujte o svoji pleť technologií, která vychází ze skutečných vědeckých poznatků!

ULTRAZVUKOVÉ VLNY

Ultrazvuk je technologie, která má díky svým vlastnostem univerzální použití. Můžete se s ním setkat ve zdravotnictví, stomatologii, estetické medicíně nebo například v lehkém průmyslu. Ultrazvuk je schopen očistit roky zarezlé ocelové trubky, ale zároveň velmi jemně a šetrně očistit plak z našich zubů. Využití se liší podle frekvence ultrazvukových vln. Základ tvoří generátor ultrazvukových vln, které působí na konkrétní předměty o různém výkonu a frekvenci. Přístroje na ošetření obličeje využívají ultrazvukové vlny.



Aplikátor po přiložení na ošetřovanou oblast uvolňuje energii se specifickým výkonem a frekvencí 3MHz. Hodnoty jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.

ZÁSADNÍ ÚČINKY ULTRAZVUKU


- Stimulace lymfatického systému obličeje.
- Zpevnění a vypnutí pleti.
- Redukce jemných mimických vrásek.
- Aktivace remodelace kolagenových vláken.
- Odstranění odumřelých buněk a nečistot.

POUŽITÍ SONOGELU

Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení). Aplikací gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikací hlavici. Užití aplikací gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny tak mohou do pleti lépe pronikat. Použít můžete jakýkoliv kosmetický přípravek na vodní bázi (kosmetický krém, sérum, ...).

FOTONOVÁ TERAPIE

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.

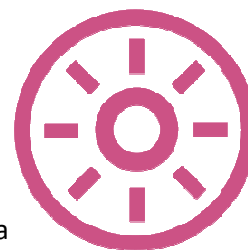

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

MODRÉ SVĚTLO 465NM

- Aktivuje porfyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie).
- Antibakteriální a protizánětlivý účinek.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Bezpečné a efektivní ošetření.

ZELENÉ SVĚTLO 525NM

- Přispívá k eliminaci epidermálních pigmentových skvrn.
- Zpomaluje produkci melaninu o 40 až 60%.
- Vyrovnává barevný tonus pokožky.
- Protizánětlivý účinek.
- Vhodný pro všechny typy pleti.

ČERVENÉ SVĚTLO 625NM

- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků.
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni.
- Brání v tvorbě pigmentu.

POPIS PŘÍSTROJE



1. Aplikační hlavice
2. Tlačítko ON/OFF
3. Tlačítko fotonové terapie
4. Tlačítko ultrazvukové terapie
5. Světelná signalizace nabíjení
6. Signalizace zapnutí přístroje
7. Signalizace úrovně terapie
8. Mřížka pro cirkulaci vzduchu

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před použitím přístroj dostatečně nabijte baterii přístroje. Použijte nabíjecí adaptér, který je součástí balení.
2. Tlačítkem **ON/OFF** přístroj zapnete.
3. Stisknutím tlačítka **PHOTON** si můžete přepínat mezi jednotlivými režimy fotonové terapie - modré, červené nebo zelené světlo.
4. Stisknutím tlačítka **SONIC** zapnete funkci působení ultrazvuku. Opakovaným stiskem tlačítka **SONIC** si můžete přepínat mezi jednotlivými režimy ultrazvuku - LOW, MIDDLE, HIGH (nízká, střední, vysoká úroveň).
5. Aplikační hlavici pohybujte postupně, pomalu a opakovaně po celém obličeji krouživými pohyby v délce 5 až 10 minut denně nebo v intenzitě 3x do týdne. ´
6. Přístroj můžete v jakékoliv fázi úplně vypnout stisknutím tlačítka **ON/OFF**.
7. **BĚHEM POUŽÍVÁNÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ FOTONOVÉ TERAPIE SE NIKDY NEDÍVEJTE PŘÍMO NA APLIKAČNÍ HLAVICI!!! VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ !!**



MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

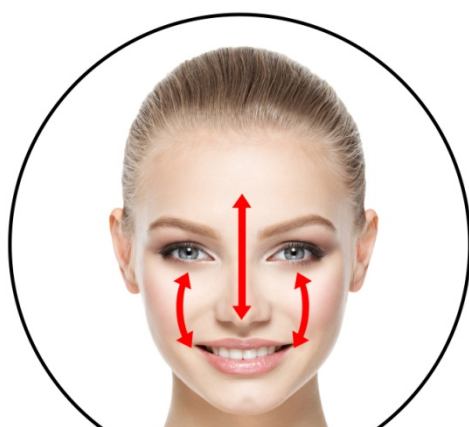

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence: 3 MHz.
- Proud: 400 mA.
- Vlnová délka červeného světla: 622x628 nm.
- Vlnová délka modrého světla: 462x468 nm.
- Vlnová délka zeleného světla: 522x528 nm.
- Výkonné LED diody fotonové terapie.
- Součástí balení jsou ochranné brýle (v režimu fotonové terapie).
- Rozměry: 5x17x5 cm.
- Hmotnost: 190 g.
- Napájení: nabíjecí baterie
- Adaptér: do sítě 220V.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Stav nabití baterie signalizuje ikona na displeji

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí adaptér, který je součástí balení.
2. Konektor připojte do vstupu na spodní straně přístroje. Druhý konec připojte do elektrické sítě 220V.
3. Průběh nabíjení signalizuje dioda „Charge“.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byly aplikátory dostatečně očištěny. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu kontaktní plochy hlavice.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.