

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-2020

VIBRASKIN SMART



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
KROK 1: DŮKLADNÉ VYČIŠTĚNÍ PLETI	5
KROK 2: UVOLNĚNÍ KOŽNÍCH PÓRŮ	5
KROK 3: ZVÝŠENÍ PRUŽNOSTI PLETI	5
KROK 4: STIMULACE PLETI FOTONOVÝM SVĚTLEM	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
OBSAH BALENÍ	5
SPECIFIKACE	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	8
SCHÉMA MASÁŽNÍCH PROGRAMŮ	9
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	10
DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST	11
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	12
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	13
NABÍJENÍ BATERIE	14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	15
CERTIFIKACE	15
DOVOZCE	15

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití poté konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.
- Jakmile dokončíte nabíjení přístroje, vytáhněte napájecí kabel z přístroje.
- Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenesí distributor odpovědnost.



KONTRAIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Vibraskin Smart je praktická kosmetická pomůcka určena pro každodenní použití. Posuňte péči o vaši pleť na jinou úroveň. Přístroj Vibraskin Smart poskytuje základní kosmetická ošetření: pečlivé vyčištění pleti, uvolnění kožních pórů a zvýšení pružnosti pleti. Použití vám nezabere více jak 10 minut pro základní čištění pleti. Pečujte o pleť technologiemi, které mají skutečné účinky!

BeautyRelax Vibraskin Smart můžete používat následovně:

KROK 1: Důkladné vyčištění pleti

Plocha přístroje je hustě pokryta silikonovými štětkami. Kartáček při pohybu po pleti ve spojení s vysokofrekvenčními vibracemi vaši pleť zbaví veškerých nečistot, částec make-upu, odumřelých kožních buněk, prachových částic a bakterií. Odstraní nečistoty, které nejsou na první pohled vidět. Mít čisté kožní póry znamená, že může vaše pleť znovu volně dýchat!

KROK 2: Uvolnění kožních pórů

Na spodní straně přístroje je umístěn aplikátor z nerez oceli. Poskytuje blahodárnou tepelnou terapii pro otevření kožních pórů. Působením tepla dochází k lokálnímu zlepšení krevního oběhu a pleť je schopna lépe vstřebat účinné látky z kosmetických přípravků.

KROK 3: Zvýšení pružnosti pleti

V režimu zvýšení pružnosti pleti se aplikátor z nerez oceli přepne na působení funkce EMS elektrických mikropulzů. Jemné elektrické pulzy stimulují obličejové svaly. Posílení svalů vede ke zlepšení pružnosti pleti.

KROK 4: Stimulace pleti fotonovým světlem

Pleť můžete v závěru stimulovat fotonovou terapií. K dispozici jsou 4 spektra fotonového světla. Každé světlo má pro pleť specifické účinky v různých spektrech vlnové délky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence oscilací: až 6000 kmitů za minutu
- Nastavení úrovně intenzity vibrací
- Materiál: zdravotně nezávadný silikon
- Nabíjení: nabíjecí baterie Li-ion
- Nabíjení: pomocí USB kabelu (součástí balení)
- Rozměry: 6x6x2,5cm
- Hmotnost: 78g

OBSAH BALENÍ


- Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2020 VIBRASKIN SMART.
- Napájecí kabel.
- Návod k obsluze.

SPECIFIKACE

- Jemné silikonové štětinky pro hloubkové čištění kožních pórů
- Skvělé pro čištění T-zóny obličeje
- Odumřelá kožní rezidua jsou s vysokou účinností odstraněna
- Odstraňuje zbytky make-upu
- Redukuje mastnotu pleti
- Pleť je hladká a svěží
- Pravidelným používáním zvyšuje pružnost pleti
- Navrženo pro ošetření pleti celého těla
- Oboustranné použití
- Ideální použití při sprchování nebo koupeli
- Určeno pro rutinní každodenní péči
- Magnetický kroužek pro uchycení čistící hadříčky
- Vodotěsná ochrana proti vodě standard IPX7
- Technologie stimulace elektrickými pulzy EMS
- Vysokofrekvenční vibrační masáž
- Fotonová terapie - červené, modré, zelené a fialové světlo
- Působení tepelné terapie
- Intenzivní čištění pleti a rejuvenace
- Zabudovaná nabíjecí baterie



POPIS PŘÍSTROJE

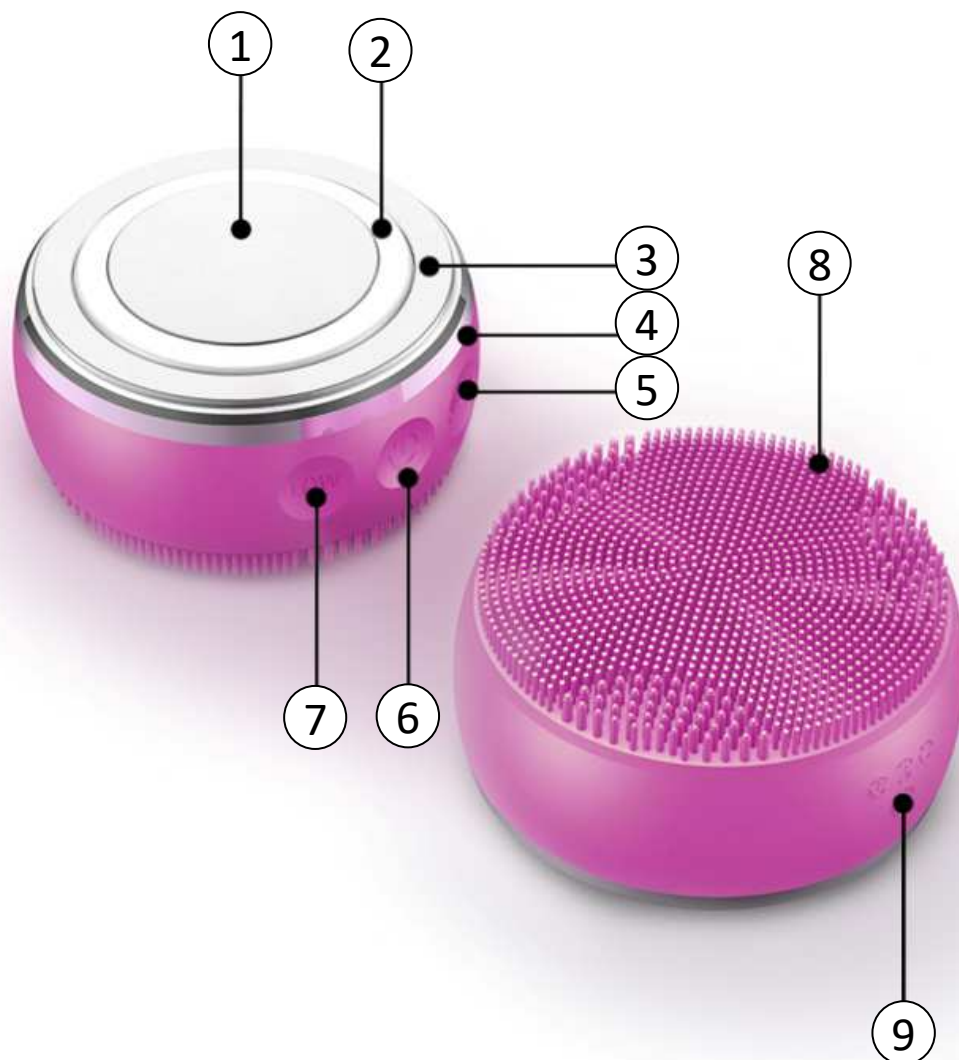

1. Plochá aplikační hlavice
2. LED fotonové světlo
3. Kroužek pro uchycení hadříčky
4. Vodící pásek
5. Zvýšení intenzity
6. Tlačítko **ON/OFF**
7. Snížení intenzity
8. Aplikátor se silikonovými štětinkami
9. Vstup pro napájecí kabel

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Pokud se rozhodnete ošetřit přístrojem obličej, odstraňte z něj zbytky makeupu běžným způsobem tak, jak jste zvyklá. Obličej opláchněte vlažnou vodou a utřete do sucha.
2. Nyní je pleť ideálně připravena pro použití přístroje. Ujistěte se, že je baterie přístroje dostatečně nabitá.
3. **KROK 1: Důkladné vyčištění pleti**

Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Dalším stiskem tlačítka aktivujete vibrace. Pomocí tlačítek **LOW** a **HIGH** si můžete upravit rychlost vibrací. Pro čištění pleti použijte stranu se silikonovým kartáčkem. Krouživými nebo táhlými pohyby postupně ošetřete celý obličej. Přístroj je vodotěsný. Můžete tak používat v koupelně během sprchování. Hlavním smyslem působení silikonových štěteček je důkladná očištění pleti od nečistot. Ve sprše můžete kombinovat s tekutým pleťovým mýdlem. Nebo naneste čistící kosmetický krém. V závěru kroku pro čištění pleti můžete pleť otřít pomocí tenkého papírového kosmetického hadříku, který uchytíte na hladký aplikátor pomocí magnetického kroužku. Pro ošetření pleti zeleným světlem použijte hladký povrch přístroje bez hadříčky.
4. **KROK 2: Uvolnění kožních pórů**

Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**. Stiskněte 3x po sobě tlačítka **ON/OFF**. Aktivní jsou tyto funkce: **fotonové světlo + vyhřívání**. Hlavním smyslem je ošetření pleti působením tepla. Kožní póry se uvolní a dojde jejich otevření. Jde o důležitý krok před aplikací vyživujícího kosmetického přípravku. Pleť působením tepla získá lepší schopnost absorbovat účinné látky z kosmetických krémů a sér.
5. **KROK 3: Zvýšení pružnosti pleti**

Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**. Ihned po spuštění přístroje jsou aktivní tyto funkce: **modré světlo + EMS pulzy + vibrace + vyhřívání**. Tento krok doporučujeme v kombinaci se sonogelem nebo jakýmkoliv kosmetickým přípravkem, který zvýší vodivost pleti. Elektrické pulzy EMS se tak mohou na pleť lépe navázat. Během používání, kdy se nachází hladký aplikátor v kontaktu s pletí, aby byly zároveň vaše prsty umístěny na vodícím pásku. Uzavřete se okruh mezi vámi a přístrojem. EMS pulzy mohou být aktivní. Pomocí tlačítek **LOW** a **HIGH** si můžete upravit intenzitu (1 až 4).
6. **KROK 4: Stimulace pleti fotonovým světlem**

Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**. Stiskněte 2x po sobě tlačítka **ON/OFF**. Aktivní jsou tyto funkce: **červené světlo + EMS elektrické pulzy + vibrace + vyhřívání**. Kombinace těchto funkcí má pozitivní účinky v kombinaci s kosmetickými přípravky. Pokud máte svůj oblíbený kosmetický přípravek (krém nebo sérum), kombinace působení těchto technologií napomáhá aktivně penetrovat účinné látky do vrstvy dermis. Váš kosmetický přípravek tak využijete s maximální efektivitou. Pokud chcete pleť ošetřit konkrétní barvou fotonového světla, aktivujte režim, který zahrnuje příslušnou barvu. Pomocí tlačítek **LOW** a **HIGH** si můžete upravit intenzitu (1 až 4).
7. Pokud je přístroj zapnutý a v průběhu jedné minuty nespustíte další režim, přístroj se automaticky vypne. Přístroj můžete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** kdykoliv vypnout.

SCHÉMA MASÁŽNÍCH PROGRAMŮ

Účinné technologie pro ošetření pleti jsou uspořádány do přednastavených módů. Jednotlivé módy si můžete nastavit pomocí tlačítka ON/OFF. Intenzitu stimulace pleti pomocí tlačítek **LOW** a **HIGH**.

	Mód 1	Mód 2	Mód 3	Mód 4
Technologie	modré světlo + EMS pulzy + vibrace + vyhřívání	zelené světlo + vibrace	červené světlo + EMS pulzy + vibrace + vyhřívání	fialové světlo + vyhřívání
Nastavení intenzity	ano	ano	ano	ne
Doporučená délka ošetření pleti	4 minuty	4 minuty	4 minuty	4 minuty
Doporučená strana pro ošetření pleti	hladký aplikátor	hladký aplikátor nebo strana se štětinkami	hladký aplikátor	hladký aplikátor
Doporučený kosmetický přípravek	sonogel, kosmetický krém, sérum nebo olejíček (s účinnými látkami)	čistící krém, micelární voda, tekuté mýdlo	kosmetický krém, sérum nebo olejíček (s účinnými látkami)	není třeba
Doporučený účel použití	podpora zvýšení pružnosti pleti	důkladné vyčištění pleti	zpracování kosmetických přípravků do pleti	uvolnění kožních pórů

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** EMS pulzy fungují pouze v případě, kdy při držení přístroje jsou vaše prsty v kontaktu s vodícím páskem po obvodu přístroje. V opačném případě aplikační hlavice nebude EMS pulzy generovat. Při kontaktu prstů s vodícími pásky se uzavře okruh mezi vámi a přístrojem. Přístroj kontakt rozpozná a následně aktivuje EMS pulzy. Tímto způsobem tak můžete ošetřit pouze sami sebe. Pokud se pokusíte ošetřit pleť druhé osoby, EMS pulzy nebudou fungovat.
- 2.** Pro správnou funkčnost režimu EMS je nezbytné zvýšit vodivost pleti pomocí sonogelu nebo jiného kosmetického přípravku na vodní bázi. Obecně platí, že lepší jsou látky bez přidaných barviv nebo aromat, které by mohly citlivou pokožku podráždit. Je třeba si vyzkoušet, jaký typ přípravku vaše pleť snáší nejlépe.
- 3.** Přístroj je vodotěsný. Přesto však po skončení použití doporučujeme otřít zbytky vlhkosti, sonogelu nebo kosmetického přípravku před dalším použitím přístroje.
- 4.** Pořadí jednotlivých kroků ošetření pleti je pouze doporučené. Nemusíte při každém použití přístroje použít všechny režimy ošetření.



DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST



Pro správnou funkci působení elektrických pulzů EMS je nezbytné, aby se během použití nacházel váš prst v kontaktu s vodícím páskem po obvodu přístroje. V opačném případě funkce EMS nebude fungovat!

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

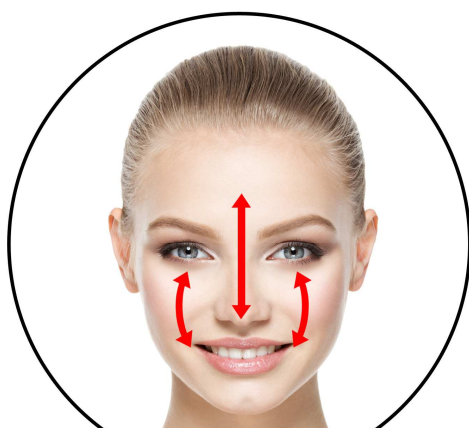

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- BeautyRelax Vibraskin Smart je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- BeautyRelax Vibraskin Smart je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
- Při ošetření nerez hlavicí v režimu EMS pulzů doporučujeme použít čirý vodivý sonogel. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. EMS pulzy získají lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken.
- V režimu působení EMS pulzů můžete cítit na pleti jako velmi jemné mravenčení. Zvýšenou pozornost dbejte zejména při ošetření oblastí obličeje, kde je velmi tenká pokožka. Obecně platí, čím je silnější vrstva podkožního tuku, tím je mravenčení méně rozpoznatelné a naopak.
- Při použití fotonového LED světla se nedívejte přímým pohledem na zdroj světla. Použití přístroje nevyžaduje žádné ochranné brýle. Pouze se snažte vyhnout dlouhému přímému pohledu na světlo. Z dlouhodobého hlediska tím chráníte svůj zrak.
- Věnujte zvýšenou pozornost dezinfekci aplikátoru zejména v případech, kdy přístroj používá více osob. Významně tak předejdete vzájemnému přenosu bakterií.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Jakmile přístroj po zapnutí nefunguje, je třeba nabít baterii.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Průběh nabíjení doprovází světelná signalizace.
4. Jakmile je baterie plně nabitá, proces nabíjení je automaticky ukončen.
5. Proces nabíjení baterie může trvat až 1 až 2 hodiny.

Upozornění: Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Došlo by k trvalému poškození přístroje a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti kovového aplikátoru. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160