

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2550

EMSROLER 4D



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
DOSAŽITELNÉ ÚČINKY	6
HLAVNÍ PŘEDNOSTI PŘÍSTROJE	6
SPECIFIKACE	6
OBSAH BALENÍ	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
EMS PULZNÍ TERAPIE	8
FOTONOVÁ TERAPIE	8
MODRÉ SVĚTLO 465NM	8
OCHABLÉ SVALY V OBLASTI OBLIČEJE	9
POPIS PŘÍSTROJE	10
POPIS DISPLEJE	11
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	12
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	14
PŘÍKLADY POUŽITÍ PŘÍSTROJE	15
DALŠÍ MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE	16
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	17
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	18
NABÍJENÍ BATERIE	19
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	19
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	20
CERTIFIKACE	20
DOVOZCE	20
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	21

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenesé distributor odpovědnost.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Při vážném kožním onemocnění v místě použití přístroje
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (platí v místě použití přístroje)
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy



POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Aplikáční gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Určitě s ním během používání přístroje nešetřete. Užití aplikačního gelu je nezbytné. EMS pulzy se tak mohou na pleť lépe navázat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky v kombinaci s přístrojem.



DOSAŽITELNÉ ÚČINKY

- Povadlá a nezdravě vyhlížející pleť
- Zvýšení pružnosti kontur obličeje
- Výrazné nerovnosti pleti způsobené věkem

HLAVNÍ PŘEDNOSTI PŘÍSTROJE

- Zcela neinvazivní charakter ošetření
- Možnost nastavení výkonu pro individuální použití
- Technické provedení válečků do tvaru V umožní snadné ošetření všech záhybů pleti
- Ošetření pleti je časově nenáročné

SPECIFIKACE

- Intenzivní 4D masáž s EMS pulzy
- Modré světlo fotonové terapie
- Určeno pro povadlou a nezdravě vyhlížející pleť
- Zvýšení pružnosti kontur obličeje
- Výrazné nerovnosti pleti způsobené věkem
- Zcela neinvazivní charakter ošetření
- Při používání budete vnímat pouze jemné mravenčení
- Možnost plynulého dávkování výkonu
- Ošetření pleti je časově nenáročné
- Určeno pro ošetření obličeje i těla
- 5 rychlostí vibrační masáže
- 5 úrovní intenzity EMS pulzů
- 5 automatických masážních programů
- Podsvícený LCD displej

OBSAH BALENÍ


- Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2550 EMSROLER 4D
- Nabíjecí USB kabel
- Síťový adaptér 220V
- Pouzdro
- Návod k obsluze

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: nabíjecí Li-ion baterie 2200mAh 3,7V
- Nabíjení: USB kabelem (součást balení)
- Rozměry: 18x9x7cm
- Hmotnost: 180g

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Kosmetický přístroj na obličej a tělo BeautyRelax Emsroller 4D je účinný nástroj pro posílení obličejových svalů. Kombinuje inovativní funkci EMS elektrických mikropulzů a mechanické 4D masáže pomocí dvou velkých válečků. Přístroj je navíc vybaven modrým světlem fotonové terapie. Vaši pleť budou hýčkat největší masážní válečky ve své kategorii. Zvyšte pružnost vaší pleti pomocí 4D face liftingu ještě dnes!

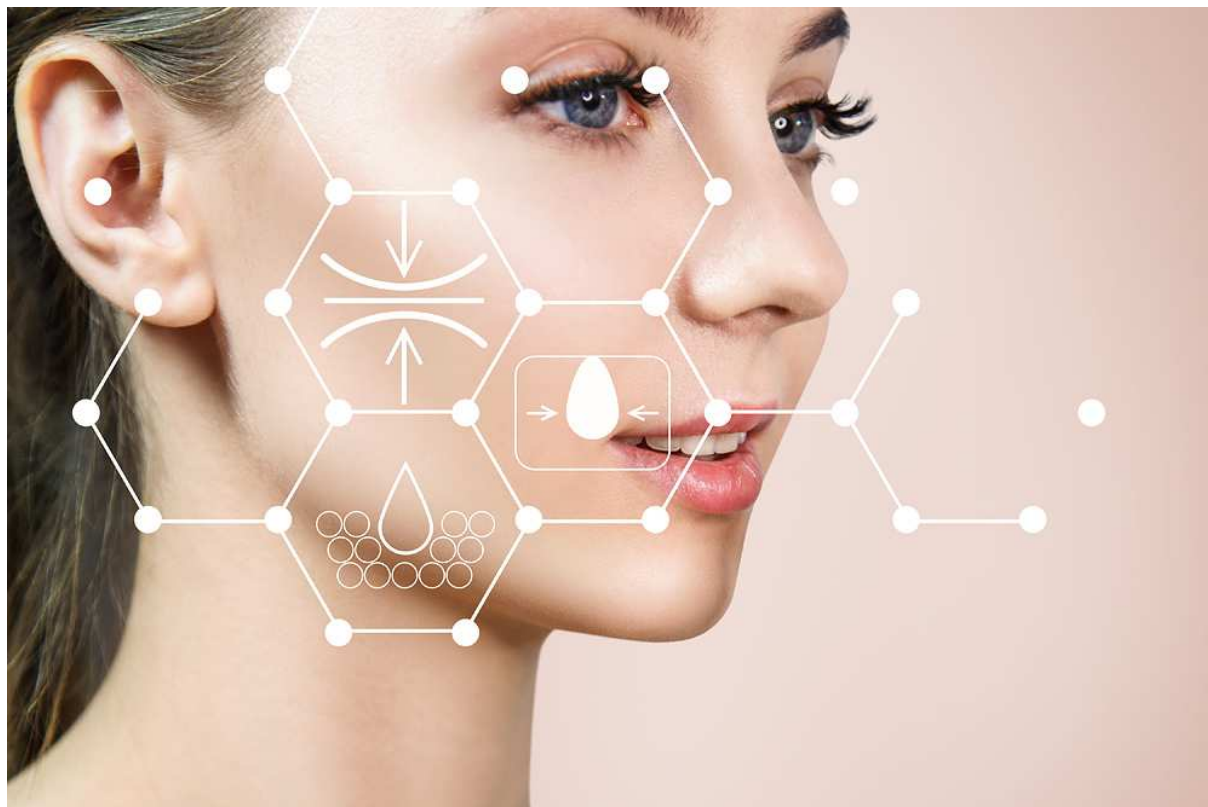

EMS PULZNÍ TERAPIE

Masážní válečky při kontaktu s pletí přenášejí elektrické pulzy. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily ošetření obličeje. Elektrické pulzy pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Plet má omlazený a prozářený vzhled.



FOTONOVÁ TERAPIE

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.



Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI


- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

MODRÉ SVĚTLO 465NM

- aktivuje porphyryny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie)
- antibakteriální a protizánětlivý účinek
- prevence proti tvorbě akné
- bezpečné a efektivní ošetření

OCHABLÉ SVALY V OBLASTI OBLIČEJE

Tím, jak naše pleť postupně stárne, nedochází pouze ke snížené produkci kolagenu a snížení pružnosti elastických vláken. Obličej je protkaný velmi hustě jemnou strukturou svalů, které působením času ochabují. Dochází tak postupně po vizuální stránce k celkovému ochabnutí částí obličeje, ztráty kontrastu a celkového tonusu. Pokud se rozhodnete pečovat o pleť pomocí přístroje na kvalitní úrovni, na obličejové svaly se nesmí zapomenout. Tak, jako chodí kulturisté do posilovny za účelem posílení svalů na jednotlivých částech těla, je třeba posílit i svaly v oblasti obličeje. Proto byl vyvinutý model BeautyRelax BR-2550 EMSROLER 4D, který je na posílení svalů specialista. Pouze technologie EMS pulzů je schopna zacílit na svaly, které jsou uloženy ve specifické hloubce.

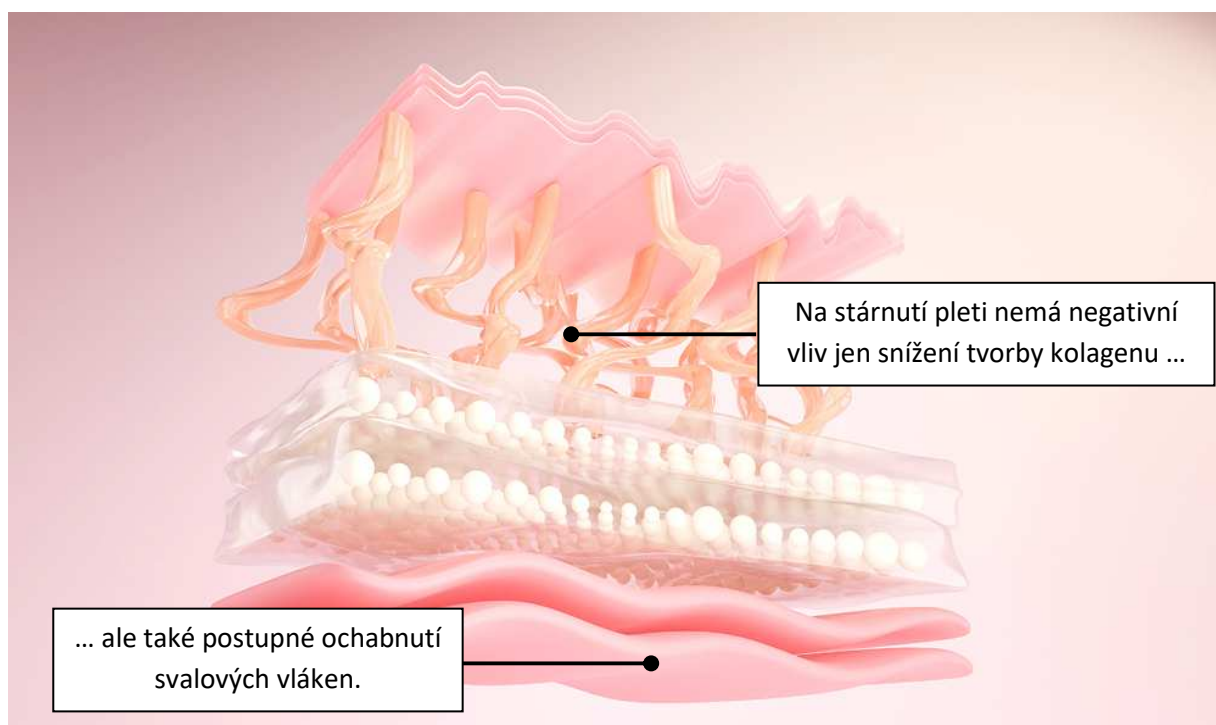

POPIS PŘÍSTROJE



1. Masážní válečky
2. LCD displej
3. Tlačítko **VIBRACE**
4. Tlačítko **EMS PULZŮ**
5. Tlačítko **MODRÉ SVĚTLO**
6. Tlačítko **MODE**
7. Tlačítko **ON/OFF**
8. Rukojeť
9. Vstup pro napájecí kabel

POPIS DISPLEJE

1. Masážní mód: 5 různých masážních módů
2. Rychlost vibrací: 5 úrovní intenzity vibrační masáže
3. Mikroproud pro EMS pulzy: 5 úrovní intenzity
4. Indikace působení modrého světla
5. Indikace stavu baterie



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Než přistoupíte k samotnému ošetření, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Použijte sonogel pro dostatečnou hydrataci pleti. Použijte sonogel libovolné značky.
- 2.** Přístroj zapnete **dlouhým stiskem** tlačítka **ON/OFF**. Zapnutí přístroje se potvrdí rozsvícením displeje a zvukovou signalizací. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.
- 3.** Pomocí krátkého stisku tlačítka **VIBRACE (VM)** si aktivujete vibrační masáž. Výchozí hodnota intenzity je na úrovni 1. Dalším stiskem stejného tlačítka **VIBRACE (VM)** postupně zvyšujete intenzitu vibrační masáže. Intenzita vibrační masáže jde postupně za sebou v tomto následujícím pořadí: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – VYPNUTO. Aktuálně nastavená intenzita vibrační masáže je zobrazena na displeji pomocí symbolů běžce. Tlačítko **VIBRACE** vždy reaguje na **krátký stisk**.
- 4.** Pomocí krátkého stisku tlačítka **EMS PULZY (MC)** si aktivujete EMS masáž pomocí mikroproudu. Výchozí hodnota intenzity je na úrovni 1. Dalším stiskem stejného tlačítka **EMS PULZY (MC)** postupně zvyšujete intenzitu působení EMS pulzů. Intenzita pulzů jde postupně za sebou v tomto následujícím pořadí: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – VYPNUTO. Aktuálně nastavená intenzita EMS pulzů je zobrazena na displeji pomocí sloupcového indikátoru. Tlačítko **EMS PULZY (MC)** vždy reaguje na **krátký stisk**. Při nastavení této technologie postupujte se zvýšenou pečlivostí. Vždy začínejte na nejnižší úrovni číslo 1. Přidávejte postupně. Dle vašeho pocitu. Ošetření by mělo být stále cítit na pleti, ale nemělo by přesáhnout úroveň, kdy vám již použití funkce není příjemné. Zvýšenou pozornost věnujte zejména v oblasti kolem očí, kde je pokožka velmi jemná a citlivá. Intenzitu je možné vždy měnit postupně za sebou od nejmenší po největší. Pokud jsou pro vás vysoké hodnoty příliš intenzivní, intenzitu nastavujte vždy tak, aby se nenacházely masážní válečky v kontaktu s vaší pletí. Vyhněte se tak stimulaci pleti s nejvyššími hodnotami EMS pulzů. Pokud je vaše pleť citlivá, není třeba využívat nejvyšší hodnoty EMS pulzů. Pracujte s takovou hodnotou, která je vám na pleti příjemná. Aby mohly EMS pulzy správně na pleť působit, musí se oba masážní válečky nacházet v kontaktu s pletí ve stejný moment. V opačném případě funkce EMS nebude pracovat.
- 5.** Pomocí tlačítka **MODE** si můžete nastavit masážní program. K dispozici je celkem 5 masážních programů. Hlavním smyslem je střídání různého tempa vibrační masáže nebo působení EMS pulzů. Zvolte si ten program, který je vám nejvíce příjemný. Programy můžete v průběhu ošetření střídát. Nastavený program indikuje symbol hvězdy v horní části displeje. Každá hvězda symbolizuje číslo programu (1 hvězda = program číslo 1, 2 hvězdy = program číslo 2, atd.).

6. Pomocí tlačítka **LED** si můžete zapnout nebo vypnout působení modrého světla. Zapnuté světlo doprovází symbol světla v pravém horním rohu displeje. Funkce modrého světla pracuje v těchto režimech: **VYPNUTO – STÁLÉ SVĚTLO – PŘERUŠOVANÉ SVĚTLO – VYPNUTO**. Všechny tyto režimy ovládáte krátkým stiskem tlačítka **LED**. Pokud se rozhodnete využít funkce modrého světla, doporučujeme režim stálého působení. Přerušovaný režim by mohl u citlivějších jedinců vyvolat stavy úzkosti případně epileptický záchvat.
7. V pravém horním rohu displeje je zobrazena ikona stavu nabití baterie. V případě potřeby baterii přístroje nabijte.
8. Přístroj má časovač automatického vypnutí po uplynutí 10 minut.
9. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.

Tip 1: Po pleti se pohybujte vždy pomalu.

Tip 2: Při ošetření dbejte na to, aby byly v kontaktu s pletí vždy oba válečky. V opačném případě nebude funkce EMS pulzů pracovat správně.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pro funkci EMS pulzů pomocí mikroproudu nabízí přístroj opravdu velký rozsah. Je to z toho důvodu, aby se funkce maximálně přizpůsobila každému uživateli. Každý máme jinou citlivost pleti. Každá pleť reaguje na působení technologie různým způsobem. U technologie EMS pulzů jde o vyvolání pravidelné kontrakce svalových vláken, kterými je protkaný celý náš obličej. Můžete například vnímat, jak EMS pulzy působí jinak např. na čele a jinak na tváři nebo bradě. Věnujte zvýšenou pozornost oblastem na obličej, kde je pokožka velmi jemná. Jde především o oblast kolem očí. Pokud je vám působení EMS pulzů v oblasti kolem očí velmi nepříjemné i při nejnižší hodnotě nastavení výkonu číslo 1, této partii se vyhněte. Hlavním smysl použití přístroje spočívá v účinné stimulaci pleti pomocí vybraných technologií. Použití přístroje musí být na pleti cítit, ale zároveň vám nesmí činit nepříjemné pocity bolesti. Proto disponuje přístroj možností nastavení výkonu, kdy si intenzitu jednotlivých technologií můžete plynule dávkovat.


POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Při použití přístroje mějte vždy obě masážní hlavice v kontaktu s pletí. Pouze tak mohou EMS pulzy efektivně navázat na pleť.
- 2.** Při použití modrého LED světla se nedívejte přímým pohledem do zdroje světla. Použití přístroje nevyžaduje žádné ochranné brýle. Letmý pohled nevádí. Pouze se snažte vyhnout dlouhému přímému pohledu na světlo nebo svícení do očí. Z dlouhodobého hlediska tím chráníte svůj zrak. K ochraně zraku přispívá spuštění modrého světla až při kontaktu aplikátoru s pletí.
- 3.** Během jednoho ošetření pleti můžete jednotlivé programy - módy postupně střídat. Snažte se zaměřit nejvíce problematické oblasti (jemné vrásky na čele, metličkové vrásky kolem očí, mimické vrásky, zvýraznění kontur, zjemnění linek na krku, atd.)
- 4. Upozornění:** Při prvním kontaktu s pletí mějte vždy zapnutou nízkou úroveň intenzity 1. Válečkové aplikátory použijte nejprve na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle intenzity můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již ošetření nepříjemné až mírně bolestivé, nastavte zpět nejnižší úroveň intenzity 1 nebo ošetření ukončete.
- 5. Tip:** Ošetřená partie by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Technologie EMS pulzů tak bude mít lepší možnost navázat se na povrch pleti.
- 6.** Pomocí přístroje můžete snadno zpracovat vaše oblíbené kosmetické přípravky, ať jsou již v jakékoliv konzistenci (vodová, gelová, krémová). Použijte funkci vibrační masáže. Kosmetický přípravek tak velmi účinně zpracujete do pleti. Pokud však chcete maximálně využít funkci EMS pulzů, doporučujeme používat čistý sonogel bez přísad. EMS pulzy se tak na pleť snadno navážou.

PŘÍKLADY POUŽITÍ PŘÍSTROJE




1. Ošetření tváře

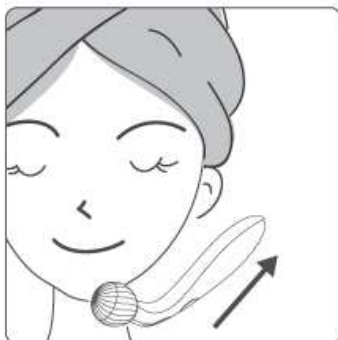


2. Ošetření brady




3. Ošetření krku

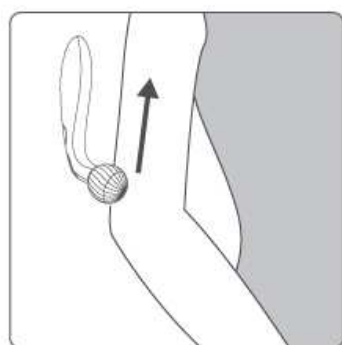

4. Ošetření paže

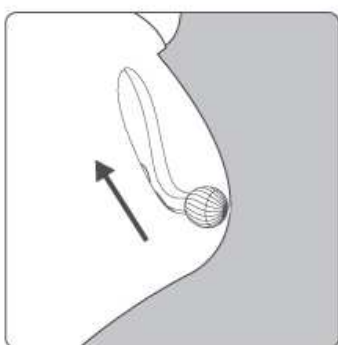

5. Ošetření pasu

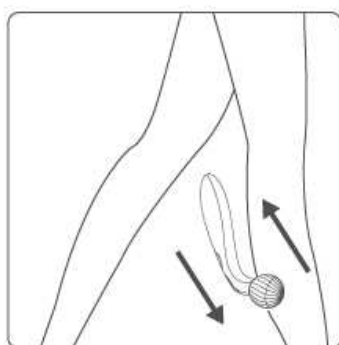

6. Ošetření nohou

DALŠÍ MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

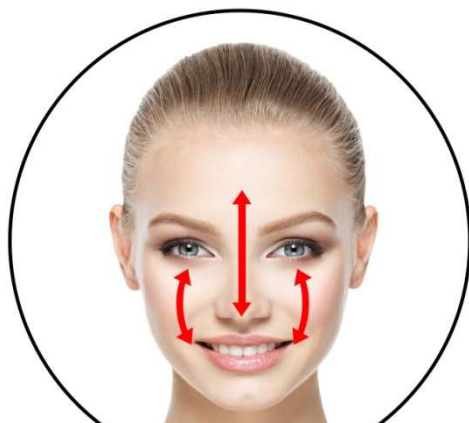

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nejde zapnout.	Tlačítko ON/OFF není stisknuto dostatečně dlouho.	Tlačítko ON/OFF podržte v délce pár sekund.
	Přístroj je zapojen k nabíjecímu USB kabelu.	Před použitím přístroje odpojte přístroj od napájecího kabelu.
	Baterie je vybitá.	Baterii přístroje před použitím dostatečně nabijte.
Problém s nabíjením.	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen k USB portu počítače nebo notebooku nebo adaptéru.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu do USB portu počítače nebo notebooku nebo adaptéru.
	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen k přístroji.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu od přístroje.
	Nabíjecí kabel je poškozen.	Vyměňte nabíjecí kabel za nový.
Působení elektrických mikropulzů je příliš silné.	Úroveň intenzity je příliš silná.	Snižte úroveň intenzity na hodnotu 1.
	Sonogel je na pleti v příliš malém množství nebo vůbec.	Aplikujte na pleť větší množství gelu pro zvýšení vodivosti pleti.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak poznám, že EMS pulzy jsou skutečně zapnuté a pracují správně?

Působení EMS pulzů ucítíte jako mravenčení. Přesně v ten moment jsou stimulovány všechny struktury jemných mimických vrásek. Pulzy stimulují kolagenní a elastická vlákna pokožky. Intenzita vnímání mravenčení závisí na úrovni intenzity, kterou máte nastavenou. Vždy začínejte od nejnižší hodnoty 1 a přidávejte postupně.

S přístrojem se pohybuji po pleti a necítím žádné pulzy. Je to v pořádku?

Působení elektrických mikropulzů je velmi subjektivní a individuální. Závisí na více faktorech. Vnímání elektrických pulzů je slabší, pokud máte na ošetřované partii silnější tukovou vrstvu. Příčina může spočívat v malém množství vodivého sonogelu na pleti. Během používání můžete také změnit úhel úchopu přístroje.

Jak zvolit správnou intenzitu funkce EMS?

Funkce EMS nabízí celkem 5 úrovní intenzity. Každý uživatel může mít jiné množství podkožního tuku. Tuk funguje jako odpor. Pleť může být navíc na různých místech různě citlivá. Nastavte si takovou intenzitu výkonu, která je vám v průběhu používání přístroje příjemná.

Jaké množství kontaktního gelu musím použít?

Použijte takové množství, aby se válečky přístroje po povrchu pleti snadno pohybovaly. Ze začátku používání přístroje dávkujte sonogel od menšího množství po větší. V praxi si vyzkoušíte, co vám při použití nejvíce vyhovuje.

Mohu přístroj používat, pokud mám na pleti make-up?

Před každým použitím přístroje vždy odstraňte všechny zbytky make-upu. Vytvářel by překážku mezi masážními válečky a pletí. Elektrické mikropulzy by tak nemohly dostatečně proniknout do pleti.

Jak často a dlouho přístroj používat?

V této oblasti není žádné výrazné omezení. Optimální délka ošetření by se měla pohybovat mezi 15 až 20 minutami. Lze každý den během odpočinku nebo sledování televize. Ráno před použitím make-upu nebo večer před spaním. Pokud je při vyšším výkonu pleť více podrážděna, před dalším použitím přístroje si udělejte den a dva pauzu. Délka použití přístroje se odvíjí také od vaší šikovnosti. Vždy je třeba vycházet z toho, abyste přístrojem plně pokryli vybranou plochu pleti.

Mohu použít přístroj kromě obličeje i na tělo?

Díky velikosti válečků lze použít přístroj nejen na obličej, ale také na tělo.

Je přístroj náročný na údržbu?

Po každém ošetření pleti věnujte pozornost zejména aplikačním válečkům. Vždy dbejte na to, aby se na nich nenacházely zbytky vlhkosti. Jednou za čas použijte líh k maximální dezinfekci.

Kdy mohu očekávat nějaké výsledky?

Rychlost docílení příznivých účinků přístroje jsou velice individuální. Záleží na mnoha faktorech: míra podkožního tuku, věk, pohlaví. K dosažení výsledků je nezbytná kontinuita přístrojového ošetření. Díky kompaktní velikosti přístroje ho sebou můžete mít i na cestách. Snažte se, aby se přístroj stal běžnou součástí vašeho každodenního rituálu péče o pleť.

Je používání v některých případech zakázáno?

Jsou situace, kdy používání přístroje není doporučeno. Následujte pasáž v tomto návodu k obsluze s názvem kontraindikace.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Vstup pro nabíjecí kabel je umístěn na spodní straně přístroje. Nabíjecí kabel je součástí balení. Druhý konec zapojíte do USB portu počítače nebo notebooku nebo adaptéru.

Postup nabíjení:

1. Nízký stav baterie indikuje ikona baterie v pravém horním rohu displeje.
2. Pro nabíjení používejte napájecí kabel s adaptérem. Jsou součástí základního balení.
3. V průběhu nabíjení ikonka baterie bliká.
4. Jakmile je baterie nabita, blikání ikony baterie ustane.
5. Délka nabíjení závisí na stavu vybití a kondici baterii. Současně se délka nabíjení odvíjí od toho, zda baterii nabíjíte přes USB port počítače nebo síťový adaptér. Přes síťový adaptér bývá baterie rychleji nabita.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byly aplikátory dostatečně očištěny. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu kontaktní plochy hlavice.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj na obličej a tělo BeautyRelax Emsroller 4D

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2550**

EAN: **8594166119420**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 10.1.2022