

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj na podporu pružnosti pleti
BeautyRelax BR-2882

EMSLIFT FLEXI



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ PŘEDNOSTI PŘÍSTROJE	5
VLASTNOSTI & SPECIFIKACE	5
OBSAH BALENÍ	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
EMS LIFTING	6
ZÁŠADNÍ ÚČINKY TECHNOLOGIE EMS	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY	8
POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE	10
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	11
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	12
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	13
NABÍJENÍ BATERIE	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	15
CERTIFIKACE	15
DOVOZCE	15

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Hlavní jednotka přístroje ani ovladač nejsou omyvatelné. Nesmí být ponořeny do vody nebo pod proud tekoucí vody (neplatí pro samotnou silikonovou masku).
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
- Přístroj není zdravotnický prostředek. Spadá do kategorie masážních přístrojů.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy



HLAVNÍ PŘEDNOSTI PŘÍSTROJE

- Zcela neinvazivní charakter ošetření.
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Při používání budete vnímat pouze jemné mravenčení.
- Ošetření pleti je časově nenáročné.

VLASTNOSTI & SPECIFIKACE

- Pokročilá technologie EMS pulzů působí v celé ploše obličeje.
- Silikonová 3D obličejová maska se přizpůsobí tvaru obličeje.
- Celé pokrytí obličeje ve srovnání s ručními přístroji.
- Přímá stimulace a posílení obličejových svalů.
- Stimulace pleti EMS pulzy.
- Možnost nastavení intenzity EMS pulzů.
- Určeno na povadlou a nezdravě vyhlížející pleť.
- Zvýšení pružnosti kontur obličeje.
- Intenzivní stimulace kolagenních a elastických vláken.
- Výrazné nerovnosti pleti způsobené věkem.
- Zcela neinvazivní charakter ošetření.
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Při používání budete vnímat pouze jemné mravenčení.
- Ošetření pleti je časově nenáročné.
- Bezdrátový (snadno se používá).
- Snadné ovládání pomocí dálkového ovladače.
- Materiál: silikon.
- Napájení: nabíjecí li-ion baterie.
- Rozměry: 22x28x0,3cm.
- Hmotnost: 90g.

OBSAH BALENÍ

- 1x Obličejová silikonová maska.
- 1x Hlavní jednotka.
- 1x Dálkový ovladač.
- 1x Nabíjecí USB kabel.
- 1x Nabíjecí síťový adaptér.
- 1x Sonogel.
- 1x Návod k obsluze.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Kosmetický přístroj na podporu pružnosti pleti BeautyRelax Emslift Smart. Určeno pro zralou a povislou pleť. Maximální efekt stimulace kolagenních a elastických vláken. Pravidelné používání udržuje pleť ve skvělé kondici. Zvýšení pružnosti pleti se zaměřením na výrazné vrásky a nerovnosti pleti. Posílení obličejových svalů.

EMS LIFTING

Obličej je protkaný hustou strukturou svalů. Obličejové svaly tvoří skupinu svalů, které mají za následek výraz a mimiku obličeje. V průběhu života však ztrácí svojí pružnost a elasticitu. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily ošetření obličeje. Aplikační hlavice kosmetického přístroje přenáší při kontaktu s pleť jemné elektrické pulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. Dochází ke kontrakci svalů a tím jejich posílení. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. Kosmetické přístroje s funkcí elektrické stimulace svalů se používají výhradně pro ošetření obličeje. Aplikační hlavice stimuluje ty části obličeje, kde je největší tuková a svalová tkáň. Dochází ke zlepšení pružnosti a pevnosti jemných obličejových svalů.



ZÁSADNÍ ÚČINKY TECHNOLOGIE EMS

- podpora krevního oběhu obličeje
- stimulace lymfatického systému obličeje
- zvýšení elasticity pleti
- redukce jemných mimických vrásek
- remodelace kolagenových vláken
- zvýšení pružnosti kontur obličeje


POPIS PŘÍSTROJE

1. Hlavní jednotka
2. Obličejová maska



POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY


1. Tlačítko zvýšení intenzity EMS pulzů
2. Tlačítko snížení intenzity EMS pulzů
3. Tlačítko **MODE** (přepínání mezi 3 masážními programy)
4. Světelný indikátor
5. Vstup pro nabíjecí kabel

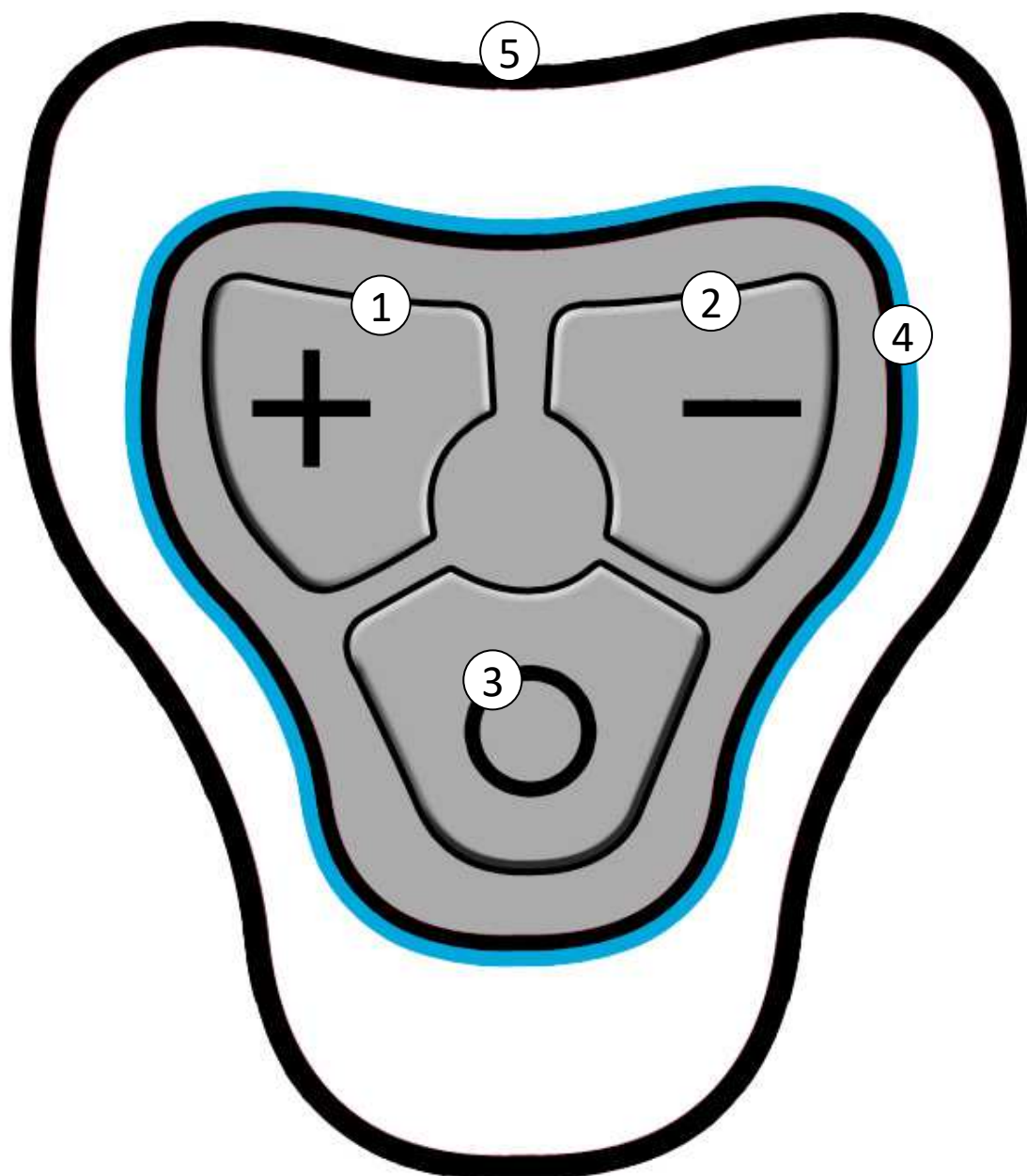

POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY


1. Konektory pro připojení obličejové masky

2. Vstup pro nabíjecí kabel

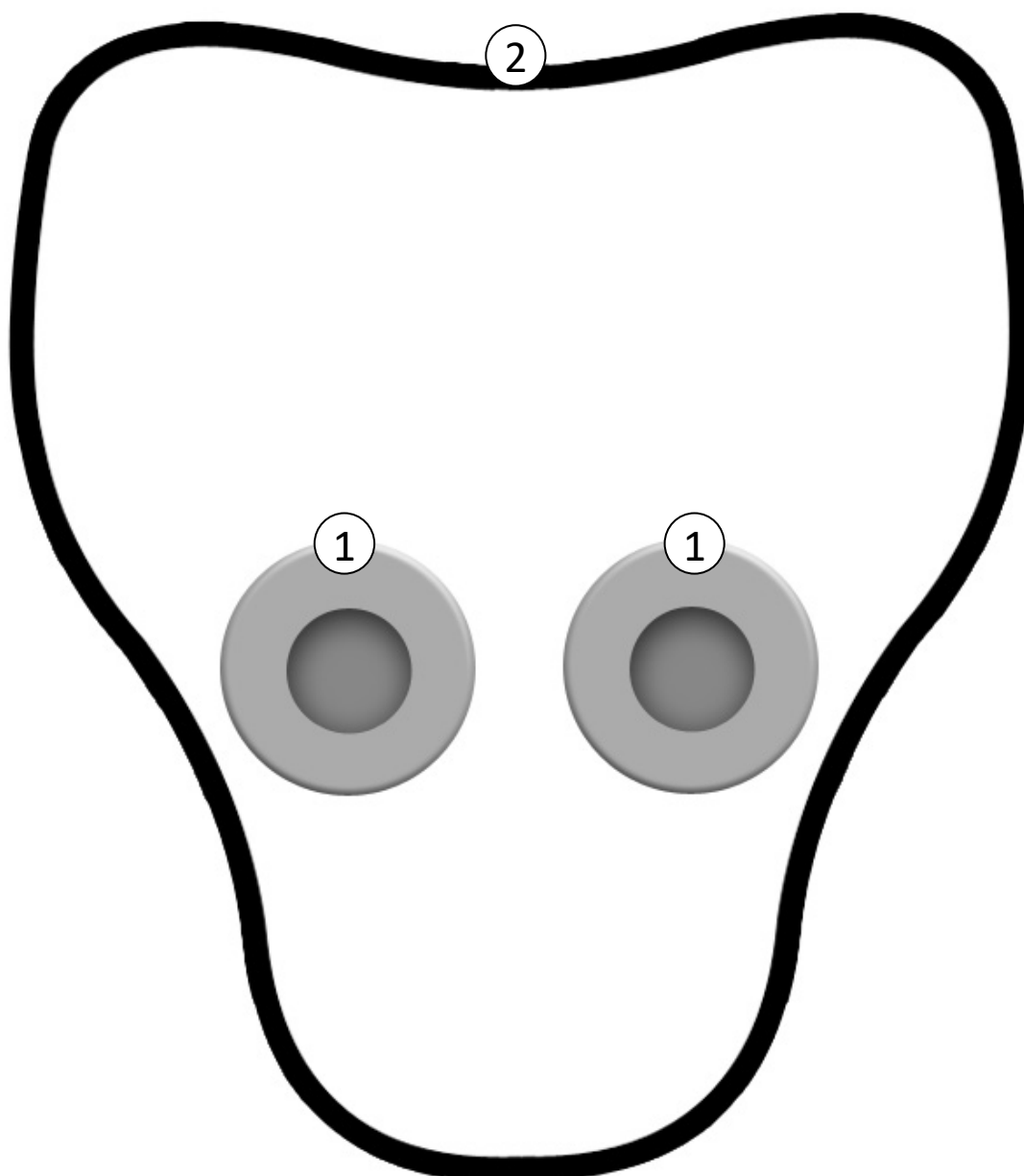

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Tlačítko **MODE** (přepínání mezi 3 masážními programy)
2. Tlačítko zvýšení intenzity EMS pulzů
3. Tlačítko snížení intenzity EMS pulzů

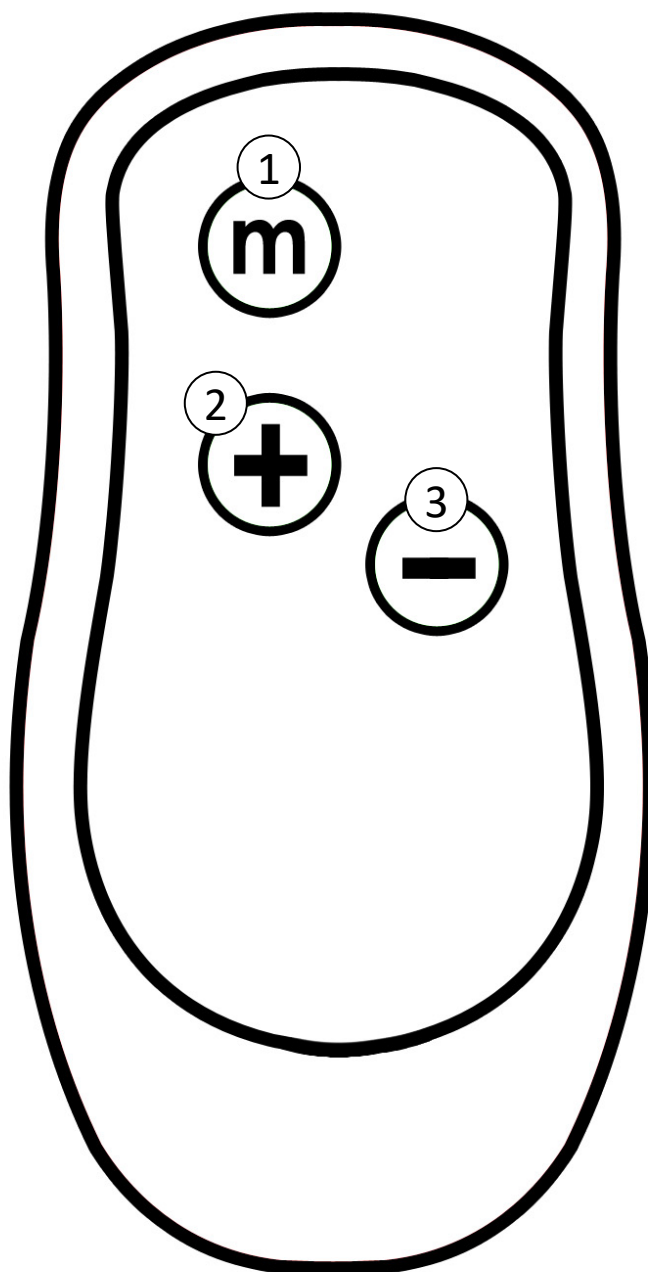

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Než přistoupíte k samotnému použití masky, očistěte pleť běžným způsobem. Odstraňte makeup. Obličej umyjte vodou a osušte. Veškeré případné nečistoty by vytvářely mechanickou bariéru, která by omezila přenos EMS pulzů.
- 2.** Hlavní jednotku nabijte pomocí nabíjecího kabelu s adaptérem, které jsou součástí balení.
- 3.** Hlavní jednotku připojte k masce. Hlavní jednotka je s maskou připojena pomocí 2 kontaktních bodů. Před aplikací masky ověřte, že je hlavní jednotka pevně připojena s maskou.
- 4.** Na vnitřní stranu masky (na část, která je v kontaktu s pletí) naneste vrstvičku sonogelu. Pomocí prstů sonogel rozetřete. Snažte se, aby sonogel pokryl rovnoměrně celou plochu masky.
- 5.** Aplikujte si masku na obličej. Snažte se pomocí prstů masku vyrovnat tak, aby byla v plném kontaktu s pletí. Masku je vyrobena ze silikonového materiálu. Měla by se co nejlépe přizpůsobit všem nerovnostem obličeje. Pro uchycení masky za uchy tyto konce nenatahujte více, než je nezbytně nutné. Mohlo by dojít k prasknutí masky.
- 6.** Masku nemusí v některých místech dokonale doléhat. Týká se to především oblasti kolem kořene nosu. Hlavním smyslem je, aby maska pokrývala čelo, pod očima a bradu.
- 7.** Stiskněte dlouze v délce několika sekund tlačítko **(+)** na hlavní jednotce. Jednotka se zapne do pohotovostního režimu. Zapnutí doprovází zvuková signalizace. Rozsvítí se světelná signalizace po obvodu tlačítek jednotky. Pokud neučiníte další krok, jednotka se během několika vteřin automaticky vypne. Pokud chcete pokračovat v použití přístroje, použijte opět dlouhý stisk tlačítka **(+)**.
- 8.** Po zapnutí hlavní jednotky je připraven k použití jeden ze tří programů. Každý program je doprovázen jinou barvou světelné signalizace po obvodu tlačítek hlavní jednotky. Masážní programy si můžete snadno měnit pomocí krátkého stisku tlačítka **(o)** (nebo pomocí tlačítka M na ovladači). Všechny tři programy jsou srovnatelné a plní stejný účel. V průběhu použití přístroje si je můžete průběžně měnit, aby nebyla masáž příliš monotónní.
- 9.** Intenzitu masáže a program masáže si můžete snadno měnit pomocí dálkového ovladače nebo přímo na hlavní jednotce. Protože je hlavní jednotka připojena k masce, z hlediska komfortu použití je lepší používat dálkový ovladač. Při použití se vždy snažte, aby byl dálkový ovladač v rozumné blízkosti hlavní jednotky. Pomocí ovladače není možné hlavní jednotku zapnout nebo vypnout. K tomu používejte tlačítka umístěná přímo na hlavní jednotce.
- 10.** Je doporučeno vždy začínat od nejnižší hodnoty intenzity a přidávat postupně.
- 11.** Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **(-)** na hlavní jednotce. Vypnutí doprovází zvuková signalizace.
- 12.** Po skončení použití setřete z pleti zbytky sonogelu. O masky odpojte hlavní jednotku. Dbejte zvýšenou pozornost, aby se kontakty na masce při odstranění jednotky nevytrhly. Došlo by k fatálnímu znehodnocení produktu. Z hlavní jednotky setřete případné nečistoty suchým hadříkem. Samotnou masku můžete omýt pod proudem tekoucí vody. Nechte přirozeně vyschnout. Masku nepokládejte na topení nebo jiný zdroj tepla.
- 13.** Po použití masky můžete na pleť nanést vaše oblíbené kosmetické přípravky.
- 14.** Doporučený čas je 20 až 30 minut každý druhý den.

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nejde zapnout.	Tlačítko (+) na hlavní jednotce mačkáte příliš krátce. Mačkáte tlačítko (+) na dálkovém ovladači.	Použijte výhradně tlačítko (+) na hlavní jednotce. Vždy dlouhý stisk v délce několika sekund.
	Baterie je vybitá.	Baterii přístroje před použitím dostatečně nabijte.
Problém s nabíjením.	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen k nabíjecímu síťovému adaptéru.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu do nabíjecího síťového adaptéru.
	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen do vstupu hlavní jednotky.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu do hlavní jednotky důkladně nadoraz.
	Nabíjecí kabel nebo adaptér je poškozen.	Vyměňte nabíjecí kabel nebo adaptér za nový.
Působení elektrických mikropulzů je příliš slabé.	Úroveň intenzity je příliš slabé.	Zvyšte úroveň intenzity na vyšší úroveň.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak poznám, že EMS pulzy pracují správně?

Přítomnost EMS pulzů jako jemné mravenčení. Přesně v ten moment jsou stimulovány všechny struktury jemných mimických vrásek. Pulzy stimulují kolagenní a elastická vlákna pokožky.

S přístrojem se pohybuji po pleti a necítím žádné pulzy. Je to v pořádku?

Působení elektrických mikropulzů je velmi subjektivní a individuální. Závisí na více faktorech. Vnímání elektrických pulzů je slabší, pokud máte na ošetřované partii silnější tukovou vrstvu. Příčina může spočívat v malém množství kosmetického krému na pleti. Během používání můžete také změnit úhel úchopu přístroje.

Jak zvolit správnou intenzitu funkce EMS?

Přístroj nabízí hned několik úrovní intenzity EMS pulzů. Každý uživatel může mít jinou vrstvu podkožního tuku. Tuk funguje jako odpor. Pokud je podkožního tuku více, elektrické pulzy musí mít větší sílu, aby pronikly až do vrstvy dermis.

Mohu přístroj používat, pokud mám na pleti make-up?

Před každým použitím přístroje vždy odstraňte všechny zbytky make-upu. Vytvářel by překážku mezi maskou a pletí. Elektrické mikropulzy by tak nemohli dostatečně proniknout do pleti.

Jak často a dlouho přístroj používat?

V této oblasti není žádné výrazné omezení. Optimální délka ošetření by se měla pohybovat mezi 20 až 30 minutami. Lze každý druhý den během odpočinku nebo sledování televize. Ideálně večer před spaním. Pokud je při vyšším výkonu pleť více podrážděna, před dalším použitím přístroje si udělejte den a dva pauzu.

Je přístroj náročný na údržbu?

Po každém použití odstraňte z masky zbytky sonogelu. V případě potřeby masku umyjte pod proudem vody a nechte přirozeně uschnout. Masku nepokládejte na zdroje tepla (např. topení). Dálkový ovladač a hlavní jednotka nejsou vodotěsné. Nejsou určeny pod proudem tekoucí vody.

Je používání v některých případech zakázáno?

Jsou situace, kdy používání přístroje není doporučeno. Následujte pasáž v tomto návodu k obsluze s názvem kontraindikace.

NABÍJENÍ BATERIE

Hlavní jednotka má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Vstup pro nabíjecí kabel je umístěn na boční straně přístroje. Nabíjecí kabel se síťovým adaptérem je součástí balení.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel se síťovým adaptérem, které jsou součástí balení.
2. Jeden konec kabelu zapojte k hlavní jednotce. Druhý konec kabelu do síťového adaptéru.
3. Průběh nabíjení doprovází světelná pulzující signalizace.
4. Jakmile je baterie nabitá, světelné pulzování ustane.
5. Délka nabíjení se odvíjí od stavu a kondici baterie.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE

- Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160