

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj na vrásky

BeautyRelax BR-3067

RFLIFT ELEGANCE



OBSAH:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	6
KDY NENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE DOPORUČENO	7
TECHNICKÉ PARAMETRY	8
OBSAH BALENÍ	8
HLAVNÍ VÝHODY	9
VLASTNOSTI PŘÍSTROJE	9
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	10
POPIS PŘÍSTROJE	17
VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ	18
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE KROK ZA KROKEM	20
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	23
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	25
MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ	28
DOPORUČENÉ POHYBY PŘÍSTROJE	29
MAPA CITLIVOSTI PLETI	30
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	31
NABÍJENÍ BATERIE	34
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	35
PÁR VĚT ZÁVĚREM	36
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	37
CERTIFIKACE	37
EU DISTRIBUTOR	37
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	38

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **BeautyRelax Rflift Elegance** je multifunkční kosmetický přístroj určený pro neinvazivní péči o pokožku obličeje, očního okolí, krku a dekoltu. Ošetření probíhá bez narušení povrchu pokožky, protože žádná část přístroje neproniká pod její svrchní vrstvu. Přístroj není zdravotnickým prostředkem a je určen výhradně ke kosmetickým účelům.
- Díky neinvazivnímu principu je přístroj vhodný pro pravidelné domácí používání. Intuitivní ovládání, přehledný displej a šest přednastavených programů umožňují snadné používání bez nutnosti odborných znalostí nebo dohledu kosmetického či zdravotnického personálu.
- BeautyRelax Rflift Elegance využívá kombinaci moderních kosmetických technologií, mezi které patří **radiofrekvenční (RF) ošetření, LED fotonová terapie, vysokofrekvenční vibrační masáž, aktivní zahřívání a chlazení aplikační hlavice**. Jednotlivé technologie jsou automaticky aktivovány podle zvoleného programu a vzájemně se doplňují pro dosažení co nejlepšího kosmetického účinku.
- Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme při programu **RF** používat **čirý vodivý gel nebo sérum na vodní bázi**. Vodivý přípravek zajišťuje optimální přenos radiofrekvenční energie do pokožky, podporuje účinnost ošetření a umožňuje plynulý pohyb aplikační hlavice po pleti. U ostatních programů lze používat také lehká hydratační séra nebo kosmetické gely na vodní bázi.
- Během ošetření udržujte aplikační hlavici neustále v kontaktu s pokožkou a pohybujte s ní pomalu a plynule podle doporučených masážních linií. Nenechávejte hlavici na jednom místě déle než 2–3 sekundy. Ošetření vždy začínějte na nejnižší úrovni intenzity a výkon zvyšujte postupně podle citlivosti pokožky. Při programu **RF** je běžným projevem příjemný pocit tepla, zatímco vibrační programy mohou být doprovázeny jemnou mikromasáží.
- Délka ošetření závisí na zvoleném programu a velikosti ošetřované oblasti. Kompletní péče o obličej obvykle trvá **10 až 15 minut**, při ošetření obličeje, krku a dekoltu může trvat až **20 minut**. Program **Daily** je určen pro každodenní péči, programy **Cleaning** a **RF** doporučujeme používat 2–3× týdně a program **Weekly** zařazujte přibližně 1–2× týdně.
- Po každém použití očistěte aplikační hlavici měkkým navlhčeným hadříkem nebo vhodným dezinfekčním prostředkem určeným pro kosmetické přístroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a přístroj nikdy neponořujte do vody. Před uložením se ujistěte, že je aplikační hlavice zcela suchá.
- Přístroj skladujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě, mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla, nadměrnou vlhkost a dosah dětí. Pro zachování dlouhé životnosti doporučujeme ukládat přístroj do nabíjecí základny nebo ochranného pouzdra, je-li součástí balení.
- Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání přístroje nebo vhodnosti jeho použití, obraťte se na zákaznickou podporu nebo autorizovaného prodejce značky **BeautyRelax**.
- Věříme, že se **BeautyRelax Rflift Elegance** stane přirozenou součástí vaší každodenní kosmetické péče. Při pravidelném používání podle doporučeného postupu může přispět k lepší hydrataci, pružnosti a svěžímu vzhledu pleti a pomoci dlouhodobě udržovat její zdravý a mladistvý vzhled.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, seznamte se se všemi obrázky a návod uschovejte pro pozdější použití.
- Přístroj používejte výhradně k domácí kosmetické péči o pokožku obličeje, okolí očí a krku v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Pokud trpíte závažným kožním onemocněním nebo si nejste jisti, zda je používání přístroje pro vás vhodné, poraďte se před použitím se svým lékařem.
- Přístroj nepoužívejte v případě těhotenství, při nošení kardiostimulátoru nebo jiného implantovaného elektronického zařízení ani při dalších kontraindikacích uvedených v tomto návodu.
- Pro správnou funkci přístroje vždy používejte vodivý gel na vodní bázi.
- Pokud přístroj používá více osob, po každém použití důkladně očistěte a dezinfikujte ošetřovací hlavici.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený, nepracuje správně nebo spadl do vody.
- Je-li přístroj poškozený nebo prasklý, nedotýkejte se jeho vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Po pádu na zem může dojít k poškození vnitřních součástí. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis.
- Přístroj nepoužívejte během nabíjení.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, umyvadlo, bazén apod.).
- Přístroj není vodotěsný. Nikdy jej neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Po každém použití přístroj vypněte a uložte na bezpečné místo.
- Pokud byl přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí, ponechte jej před použitím alespoň 3 hodiny aklimatizovat.
- Přístroj není určen dětem ani osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dozoru odpovědné osoby.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Přístroj nepokládejte na horké povrchy ani do jejich blízkosti (radiátor, kamna, otevřený oheň apod.).
- Přístroj žádným způsobem nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisu.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí chráněném před prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Během provozu přístroj ničím nezakrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Nepoužívejte přístroj déle, než je doporučeno v tomto návodu, ani neopakujte ošetření stejného místa bezprostředně po sobě.
- V případě bolesti, pálení, výrazného zarudnutí nebo jiné neobvyklé reakce pokožky přístroj okamžitě vypněte a další použití přerušete.
- Distributor ani výrobce neodpovídají za škody na zdraví nebo majetku způsobené používáním přístroje v rozporu s tímto návodem, nedodržením bezpečnostních pokynů nebo neodbornými zásahy do zařízení.

POUŽITÍ SONOGELU

Pro dosažení optimálních výsledků při používání přístroje **BeautyRelax Rflift Elegance** doporučujeme při programu **RF** používat **čirý vodivý gel nebo sérum na vodní bázi**. Vhodný je například kontaktní ultrazvukový gel (např. Sonogel nebo jiný zdravotnický kontaktní gel bez parfemace, olejových složek a dalších přísad), který je běžně dostupný v lékárnách nebo prodejnách zdravotnických potřeb.



Vodivý gel zajišťuje optimální kontakt mezi aplikační hlavicí a pokožkou. Díky tomu umožňuje účinnější přenos radiofrekvenční energie (RF), usnadňuje plynulý pohyb hlavičky po pokožce, snižuje tření a zvyšuje komfort během ošetření. Současně podporuje lepší vstřebávání aktivních látek z kosmetických přípravků a přispívá k dosažení maximální účinnosti radiofrekvenčního ošetření.

Používání programu **RF** bez vodivého gelu nebo séra na vodní bázi nedoporučujeme. Nedostatečný kontakt mezi hlavicí a pokožkou může snížit účinnost ošetření a způsobovat nepříjemné pocity při pohybu hlavičky po pleti.

Máte-li během studia tohoto návodu nebo při používání přístroje jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese **mh@santadria.cz**.

Tento návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí. Pravidelným používáním přístroje v souladu s uvedenými pokyny můžete podpořit zdravý, svěží a mladistvý vzhled své pleti a naplno využít všech funkcí, které **BeautyRelax Rflift Elegance** nabízí.

KDY NENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE DOPORUČENO

Přístroj **není** doporučené používat pro osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- během těhotenství a kojení,
- osobám s kardiostimulátorem nebo jinými implantovanými elektronickými přístroji,
- při onkologickém onemocnění,
- při epilepsii,
- při závažných srdečních onemocněních,
- při poruchách citlivosti pokožky,
- při akutních zánětlivých nebo infekčních onemocněních,
- při horečce nebo celkovém oslabení organismu,
- při otevřených ranách, odřeninách nebo popáleninách,
- na zanícenou, podrážděnou nebo silně citlivou pokožku,
- na místa s ekzémem, lupénkou nebo jinými aktivními kožními onemocněními,
- na oblast s virovými bradavicemi nebo oparem,
- bezprostředně po estetických zákrocích (laser, chemický peeling, výplně, botulotoxin, mikro Jehličkování apod.), dokud použití neschválí lékař,
- po plastických operacích v ošetřované oblasti do úplného zhojení,
- při přítomnosti kovových implantátů v ošetřované oblasti (pokud lékař nedoporučí jinak),
- při závažných očních onemocněních (např. glaukom, odchlípení sítnice nebo po operaci očí bez souhlasu očního lékaře).

Přístroj nepoužívejte:

- přímo na oční víčka nebo oční bulvy,
- na štítnou žlázu,
- na oblast hrdla v okolí hrtanu,
- na otevřené rány nebo krvácející místa,
- na sliznice.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ přístroje: kosmetický přístroj na vrásky
- Model: BeautyRelax RFlift
- Technologie: 2 MHz radiofrekvence (RF), EMS, LED fotonová terapie
- Raofrekvenční frekvence: 2 MHz
- EMS stimulace: ano
- LED světelná terapie: ano
- Vlnové délky LED: 595 nm (žlutá), 635 nm (červená), 940 nm (infračervená)
- Počet režimů: 4
- Režimy ošetření: obličej, okolí očí, V-Lift (kontury obličeje), krk
- Úroveň intenzity: 3
- Typ ovládání: tlačítkové
- Displej: LED světelná indikace
- Masážní hlavice: ergonomická
- Doporučené použití: s vodivým gelem nebo sérem na vodní bázi
- Napájení: vestavěný Li-Ion akumulátor
- Kapacita baterie: 1000 mAh
- Doba nabíjení: přibližně 1 hodina
- Výdrž baterie: až 40 minut provozu
- Nabíjecí konektor: USB-C
- Nabíjení: nabíjecí základna
- Bezdrátový provoz: ano
- Automatické vypnutí: ano
- Materiál: ABS plast, nerezová ošetrovací hlavice
- Určeno pro: obličej, okolí očí, krk a dekolt
- Doporučená frekvence používání: 3–5× týdně
- Barva: bílá se zlatými prvky
- Obsah balení: kosmetický přístroj, nabíjecí základna USB-C, USB kabel, síťový adaptér, návod k použití
- Rozměry: 175 × 48 × 43 mm
- Hmotnost: přibližně 155 g

OBSAH BALENÍ

- 1x Kosmetický přístroj BeautyRelax
- 1x Nabíjecí stojánek
- 1x USB kabel
- 1x Napájecí adaptér 220V
- 1x Návod k obsluze

HLAVNÍ VÝHODY

- Kombinuje tři technologie v jednom přístroji – RF radiofrekvenci, EMS stimulaci a LED fotonovou terapii.
- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu a elastinu pro pevnější a pružnější pleť.
- Pomáhá redukovat vzhled jemných vrásek a zlepšovat elasticitu pokožky.
- Přispívá ke zpevnění kontur obličeje a liftingovému efektu.
- Tři druhy LED světla cílí na rozjasnění, regeneraci a obnovu pokožky.
- Nabízí čtyři programy pro péči o obličej, oční okolí, kontury obličeje a krk.
- Tři nastavitelné úrovně intenzity umožňují přizpůsobit ošetření citlivosti pokožky.
- Ergonomická vyhřívaná hlavice zajišťuje pohodlné a efektivní ošetření.
- Podporuje lepší vstřebávání sér a dalších kosmetických přípravků.
- Bezdrátové provedení s nabíjecí základnou umožňuje komfortní používání.
- Intuitivní ovládání jedním tlačítkem usnadňuje každodenní použití.
- Kompaktní design je vhodný pro domácí použití i na cesty.
- Neinvazivní péče bez jehel a bez rekonvalescence.
- Pravidelné používání pomáhá udržovat pleť hladší, pevnější a svěžejší.
- Vhodný pro péči o všechny typy pleti.

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

- 2 MHz radiofrekvenční technologie (RF) pro podporu tvorby kolagenu a zpevnění pokožky
- EMS elektrická stimulace obličejových svalů pro zlepšení kontur obličeje
- LED fotonová terapie se třemi vlnovými délkami (595 nm, 635 nm, 940 nm)
- 4 režimy ošetření: obličej, okolí očí, kontury obličeje (V-Lift), krk
- 3 nastavitelné úrovně intenzity
- Ergonomická masážní hlavice pro pohodlné použití
- Tepelné ošetření podporující vstřebávání kosmetických přípravků
- Bezdrátový provoz
- Intuitivní ovládání jedním tlačítkem
- LED indikace zvoleného režimu
- Automatické vypnutí po ukončení programu
- USB-C se síťovým adaptérem nabíjení prostřednictvím nabíjecí základny

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Kosmetický přístroj na vrásky BeautyRelax RFlift je moderní zařízení pro domácí péči o pleť, které kombinuje 2 MHz radiofrekvenční technologii (RF), EMS elektrickou stimulaci svalů a LED fotonovou terapii. Tato kombinace podporuje přirozenou tvorbu kolagenu a elastinu, pomáhá zlepšit pružnost pokožky, zpevnit kontury obličeje a zmírnit viditelnost jemných vrásek. LED světelná terapie využívá tři vlnové délky – žluté světlo (595 nm) pro rozjasnění a sjednocení tónu pleti, červené světlo (635 nm) pro podporu regenerace a elasticity a infračervené světlo (940 nm) pro hloubkovou obnovu pokožky. Přístroj nabízí čtyři specializované režimy pro ošetření celého obličeje, okolí očí, kontur obličeje a krku a tři nastavitelné úrovně intenzity, které umožňují přizpůsobit péči individuálním potřebám. Ergonomicky tvarovaná masážní hlavice se přizpůsobí konturám obličeje a při použití s vodivým gelem nebo sérem podporuje lepší vstřebávání aktivních látek. Vestavěná baterie s kapacitou 1000 mAh poskytuje až 40 minut provozu na jedno nabití a elegantní nabíjecí základna s USB-C zajišťuje pohodlné každodenní používání. BeautyRelax RFlift představuje účinné řešení pro pravidelnou domácí péči, které pomáhá udržovat pleť pevnější, hladší, svěžejší a viditelně mladistvější.

TŘÍ-ÚROVŇOVÁ SÍLA ŠESTI-FUNKČNÍ VÝBĚR REŽIMŮ




MASÁŽ PRO PÉČI O OČNÍ OKOLÍ ODSTRANĚNÍ VRÁSEK

Pomáhá vstřebávání očního krému, odstraňuje tmavé kruhy, vějířky vrásek a váčky pod očima, a zlepšuje vrásky v očním okolí



NOVÝ DOMÁCÍ KOSMETICKÝ PŘÍSTROJ

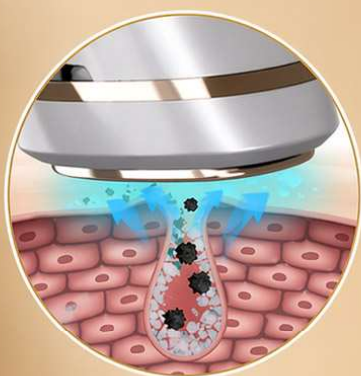

Upgrade Výzkumu a Vývoje, Pohodlný Zážitek

Hlubkové čištění pórů,
zpevnění pleti a podpora
vstřebávání účinných látek.



Hlubkové
čištění



Vypnutí pleti



Modré světlo
a led



Červené světlo
a RF



Péče o oči



Vibrace s vysokou
frekvencí



Radiofrekvenční technologie (RF)

Radiofrekvenční technologie (Radio Frequency) představuje jednu z nejpoužívanějších metod moderní neinvazivní péče o pleť. BeautyRelax RFlift využívá radiofrekvenční energii o frekvenci 2 MHz, která při kontaktu s pokožkou vytváří jemné a kontrolované zahřívání hlubších vrstev kůže. Působením tepelné energie dochází ke stimulaci přirozených regeneračních procesů pokožky. Radiofrekvenční energie podporuje aktivitu buněk odpovědných za tvorbu kolagenu a elastinu – dvou základních bílkovin, které zajišťují pevnost, pružnost a mladistvý vzhled pokožky. Pravidelným používáním může radiofrekvenční ošetření přispět ke zlepšení elasticity pokožky, redukci jemných vrásek, zpevnění kontur obličeje a celkovému omlazení vzhledu pleti. Při ošetření je důležité používat vodivý gel, který zajišťuje optimální přenos radiofrekvenční energie do pokožky a umožňuje plynulý pohyb hlavičky po povrchu pleti.

EMS elektrická stimulace svalů

EMS (Electrical Muscle Stimulation) využívá jemné elektrické impulzy, které stimulují drobné obličejové svaly. Stejně jako svaly ostatních částí těla mohou i obličejové svaly s přibývajícím věkem postupně ztrácet svůj tonus. To může přispívat k ochabování kontur obličeje a vzniku hlubších mimických vrásek. Elektrické impulzy vytvářené přístrojem vyvolávají jemné stahy svalových vláken, čímž podporují jejich aktivitu. Výsledkem může být pevnější vzhled kontur obličeje, lepší tonus pokožky a svěžejší vzhled pleti. Během ošetření můžete cítit jemné mravenčení nebo lehké pulzování. Tyto pocity jsou zcela běžné a jsou projevem správné funkce EMS technologie.

LED fotonová terapie

BeautyRelax RFlift využívá LED světelnou terapii, která představuje šetrnou metodu kosmetické péče bez použití ultrafialového záření. Jednotlivé barvy světla mají odlišnou vlnovou délku a jsou určeny pro různé potřeby pokožky.

Žluté světlo (595 nm)

Žluté světlo pomáhá rozjasnit unavenou pleť a sjednotit její barevný tón. Podporuje zdravější vzhled pokožky a přispívá k její celkové vitalitě.

Je vhodné zejména pro mdlou, unavenou nebo citlivější pleť.

Červené světlo (635 nm)

Červené světlo patří mezi nejpoužívanější světelné technologie v kosmetické péči. Podporuje přirozenou regeneraci pokožky, přispívá ke zlepšení její pružnosti a pomáhá redukovat viditelnost jemných vrásek.

Při pravidelném používání může pleť působit pevnějším, hladším a mladistvějším dojmem.

Infračervené světlo (940 nm)

Infračervené světlo proniká hlouběji než světlo viditelného spektra. V kosmetické péči se používá jako doplněk radiofrekvenční technologie a podporuje přirozené regenerační procesy pokožky.

Současně napomáhá příjemnému prohřátí ošetřované oblasti a zvyšuje komfort během aplikace.

Synergické působení technologií

BeautyRelax RFlift využívá kombinaci tří moderních kosmetických technologií – radiofrekvenční energie (RF), EMS elektrické stimulace svalů a LED fotonové terapie. Každá z těchto technologií působí na pokožku odlišným způsobem a zaměřuje se na jinou část procesu péče o pleť. Jejich současné použití umožňuje dosáhnout komplexnějšího účinku, než kdyby byly používány samostatně.

Radiofrekvenční technologie působí především v hlubších vrstvách pokožky, kde vytváří kontrolované zahřívání. Tím podporuje přirozené regenerační procesy a přispívá ke stimulaci tvorby kolagenu a elastinu, které jsou důležité pro pevnost a pružnost pokožky.


EMS technologie se zaměřuje na drobné obličejové svaly. Jemné elektrické impulzy podporují jejich aktivitu a tonus, což může přispět k pevnějším konturám obličeje a mladistvějšímu vzhledu.

LED fotonová terapie doplňuje účinek radiofrekvence a EMS. Jednotlivé vlnové délky světla podporují přirozenou regeneraci pokožky, sjednocují její vzhled a přispívají ke zlepšení celkové vitality pleti.


Během ošetření všechny technologie pracují současně a vzájemně se doplňují. Radiofrekvenční energie podporuje obnovu kožní struktury, EMS stimuluje obličejové svaly a LED světlo působí na povrchové i hlubší vrstvy pokožky podle zvolené vlnové délky. Díky této kombinaci dochází ke komplexní péči o pokožku i podkožní tkáň.

Pravidelné používání přístroje podle doporučeného postupu může přispět ke zlepšení elasticity pokožky, zpevnění kontur obličeje, zmírnění vzhledu jemných vrásek a celkovému rozjasnění pleti. Nejlepších výsledků je zpravidla dosahováno při dlouhodobém a pravidelném používání v kombinaci s vhodnou kosmetickou péčí.

POPIS PŘÍSTROJE

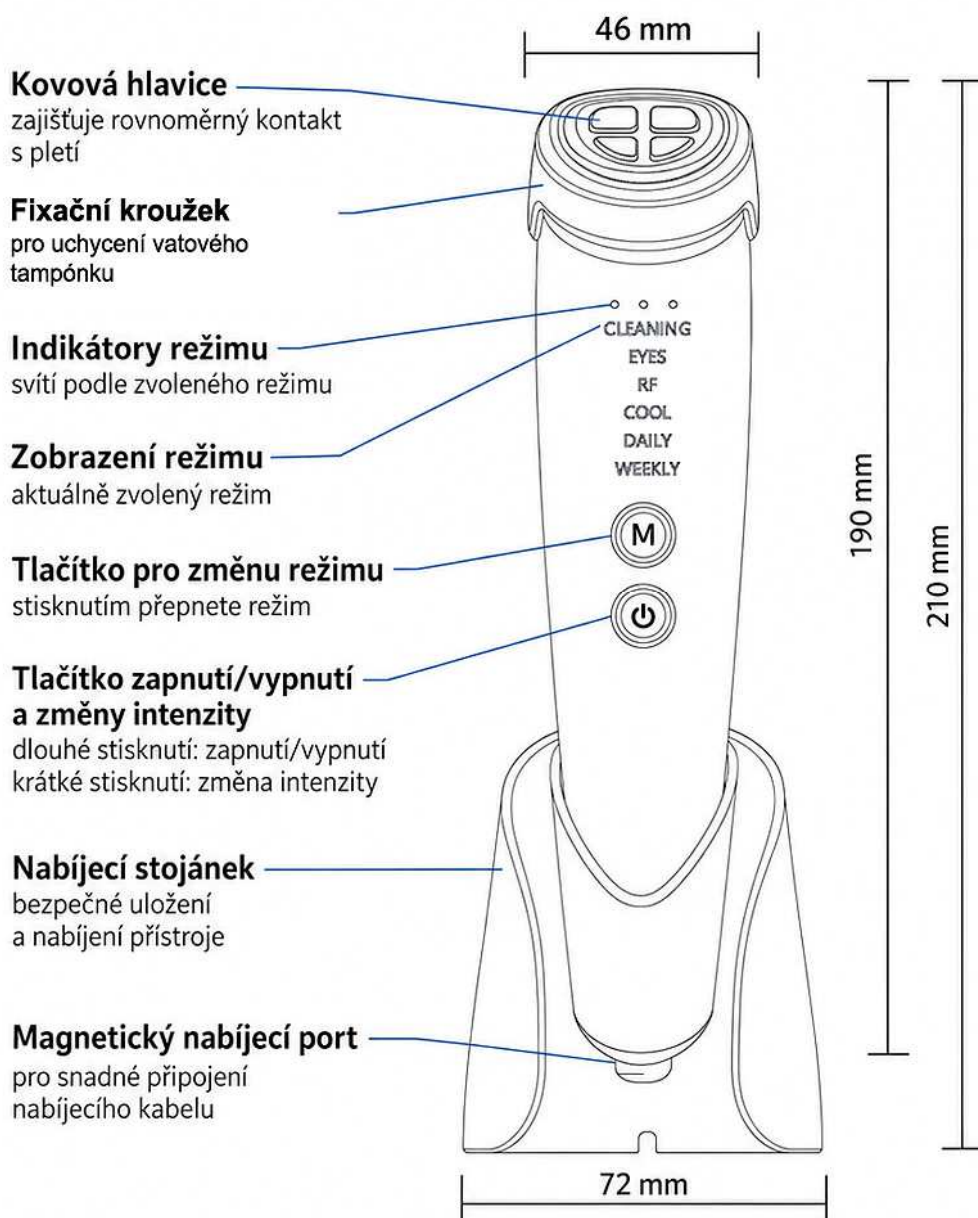

Vodivý prvek na zadní straně
zlepšuje účinnost ošetření

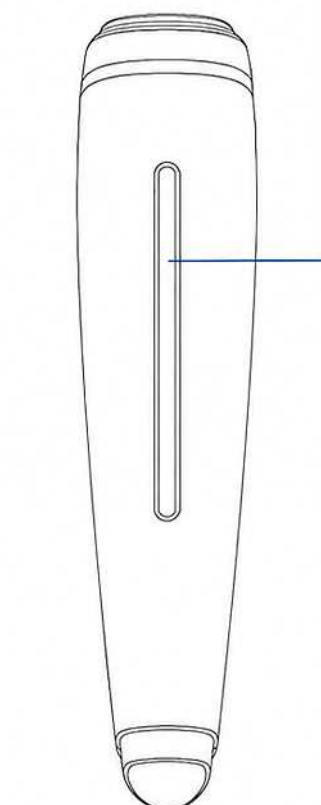

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

Přístroj **BeautyRelax Rflift Elegance** nabízí šest specializovaných programů, které jsou navrženy pro různé potřeby pleti a fáze kosmetického ošetření. Každý program automaticky kombinuje vhodné technologie, jako jsou radiofrekvenční (RF) ošetření, EMS mikroproudy, LED světelná terapie, vysokofrekvenční vibrace a tepelná nebo chladivá péče, aby bylo dosaženo co nejlepšího účinku. Díky tomu lze přístroj využít pro hloubkové čištění, zpevnění pokožky, péči o oční okolí, podporu regenerace i každodenní udržování zdravého a mladistvého vzhledu pleti.

CLEANING – Hloubkové čištění pleti

Program **Cleaning** je určen k důkladnému vyčištění pokožky a její přípravě na následnou kosmetickou péči. Kombinace vibrací, LED světla a mírného zahřátí pomáhá uvolnit nečistoty, odstranit přebytečný kožní maz a připravit pleť na lepší vstřebávání účinných látek.

Způsob

použití:

Před použitím pleť důkladně odličte a očistěte. Ošetřovací hlavicí pomalu přejíždějte po pokožce od středu obličeje směrem ven a vzhůru. Ošetření provádějte přibližně **5 minut**, 2–3× týdně.

EYES – Péče o oční okolí

Program **Eyes** je speciálně navržen pro jemnou pokožku v okolí očí. Pomáhá podporovat mikrocirkulaci, zlepšuje vstřebávání oční kosmetiky a přispívá ke zmírnění otoků, tmavých kruhů i jemných vrásek.

Způsob

použití:

Na oční okolí naneste malé množství očního séra nebo krému. Hlavicí jemně přejíždějte pod očima od vnitřního koutku směrem ke spánkům a poté nad obočím zpět ke kořeni nosu. Vyhněte se přímému kontaktu s oční bulvou. Doporučená doba ošetření je **2–3 minuty na každé oko**.

RF – Radiofrekvenční lifting

Program **RF** využívá radiofrekvenční technologii pro jemné prohřátí hlubších vrstev pokožky. Podporuje tvorbu kolagenu a elastinu, zvyšuje pevnost a pružnost pleti a pomáhá redukovat jemné vrásky.

Způsob

použití:

Na pokožku naneste vodivý gel nebo sérum na vodní bázi. Hlavicí pomalu přejíždějte od

středu obličeje směrem ven a vždy směrem vzhůru. Na jednom místě nezůstávejte déle než 2–3 sekundy. Ošetření provádějte **5–10 minut**, 2–3× týdně.

COOL – Chladivá péče

Program **Cool** slouží ke zklidnění pokožky po kosmetickém ošetření nebo kdykoliv během dne pro osvěžení pleti. Chladivá hlavice pomáhá stáhnout póry, zmírnit zarudnutí a dodat pokožce svěží vzhled.

Způsob

použití:

Po dokončení ošetření nebo po nanesení kosmetického přípravku přejíždějte hlavicí pomalu po obličeji od středu směrem ven. Ošetření trvá přibližně **3–5 minut**.

DAILY – Každodenní péče

Program **Daily** je určen pro pravidelnou každodenní péči o pleť. Jemně stimuluje pokožku, podporuje vstřebávání kosmetických přípravků a pomáhá udržovat pleť hydratovanou, pružnou a svěží.

Způsob

použití:

Po nanesení séra nebo krému přejíždějte hlavicí po obličeji pomalými tahy směrem vzhůru. Program je vhodný pro **každodenní použití** v délce přibližně **5 minut**.

WEEKLY – Intenzivní týdenní péče

Program **Weekly** poskytuje intenzivnější kosmetické ošetření zaměřené na regeneraci a omlazení pokožky. Kombinace technologií podporuje obnovu pleti, zlepšuje její pevnost a pomáhá zmírňovat známky stárnutí.

Způsob

použití:

Na vyčištěnou pleť naneste vodivé sérum nebo gel a ošetřujte pokožku pomalými pohyby od středu obličeje směrem ven a vzhůru. Doporučená délka ošetření je **8–10 minut**, **1–2× týdně**.

Doporučení

Pro dosažení nejlepších výsledků používejte přístroj pravidelně a vždy na čistou pleť. Při programech **RF**, **Daily** a **Weekly** doporučujeme používat vodivý gel nebo sérum na vodní bázi, které zlepšuje kontakt ošetřovací hlavice s pokožkou a podporuje účinnost jednotlivých technologií. Vyhněte se ošetření poraněné, podrážděné nebo zanícené pokožky a hlavicí pohybuje plynule, bez zbytečného tlaku.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE KROK ZA KROKEM

Kosmetický přístroj **BeautyRelax Rflift Elegance** je vybaven intuitivním dotykovým ovládáním a šesti přednastavenými programy péče o pleť. Jednotlivé programy automaticky nastavují vhodnou kombinaci technologií, takže obsluha je velmi jednoduchá. Při každém ošetření doporučujeme používat kosmetické sérum nebo vodivý gel na vodní bázi, který zajistí optimální kontakt aplikační hlavice s pokožkou.

Krok 1 – Zapnutí přístroje

Stiskněte a přibližně **2 sekundy podržte tlačítko ON/OFF**. Přístroj se zapne a aktivuje se výchozí program.

Krok 2 – Výběr programu

Krátkými stisky tlačítka **M (Mode)** postupně přepínáte mezi jednotlivými programy:

- **Cleaning** – hloubkové čištění pleti
- **Eyes** – péče o oční okolí
- **RF** – radiofrekvenční lifting
- **Cool** – chladivá péče
- **Daily** – každodenní péče
- **Weekly** – intenzivní týdenní péče

Na displeji se zobrazí název zvoleného programu.

Krok 3 – Nastavení intenzity

Po výběru programu nastavte požadovanou intenzitu ošetření. Přístroj nabízí **tři úrovně intenzity**, které se přepínají opakovaným stiskem tlačítka pro nastavení výkonu.

Doporučení:

- **Úroveň 1** – citlivá nebo suchá pleť, první použití.
- **Úroveň 2** – běžná každodenní péče.
- **Úroveň 3** – intenzivnější ošetření zkušenějšími uživateli.

Při prvním použití vždy začněte nejnižší intenzitou.

Krok 4 – Nanesení kosmetického přípravku

Na čistou a suchou pokožku naneste dostatečné množství kosmetického séra, vodivého gelu nebo hydratačního přípravku na vodní bázi.

Tip: Při použití programu **RF** je použití vodivého gelu nebo séra nezbytné pro správný přenos radiofrekvenční energie.

Krok 5 – Provedení ošetření

Přiložte aplikační hlavici na pokožku tak, aby byla celou plochou v kontaktu s pletí.

Provádějte pomalé plynulé tahy:

- od středu brady směrem k uším,
- od koutků úst směrem ke spánkům,
- od nosu přes tváře směrem ven,
- od obočí vzhůru k vlasové linii,
- na krku směrem od klíčních kostí k bradě.

Vyvíjejte pouze lehký tlak. Hlavici udržujte neustále v pohybu a nenechávejte ji na jednom místě déle než **2–3 sekundy**.

Krok 6 – Ukončení ošetření

Po dokončení programu přístroj vypněte dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.

Pokud přístroj nepoužíváte, po určité době se automaticky vypne, aby šetřil energii akumulátoru.

Krok 7 – Čištění přístroje

Po každém použití:

1. vypněte přístroj,
2. měkkým navlhčeným hadříkem očistěte kovovou aplikační hlavici,
3. osušte ji měkkou utěrkou,
4. přístroj uložte na suché místo.

Nikdy přístroj neponořujte do vody ani nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Doporučený postup kompletního ošetření

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme postupovat v následujícím pořadí:

1. **Očistěte pleť** a odstraňte make-up.
2. **Program Cleaning** – připravte pokožku na ošetření.
3. Naneste **sérum nebo vodivý gel**.
4. Zvolte požadovaný program (**Daily**, **RF**, **Eyes** nebo **Weekly**) podle potřeb pleti.
5. Po ukončení ošetření použijte **program Cool**, který pokožku zklidní a pomůže stáhnout póry.
6. Nakonec aplikujte svůj oblíbený hydratační nebo regenerační krém.

Doporučení: Pro viditelné výsledky používejte přístroj pravidelně. Každodenní péči zajistí program **Daily**, zatímco intenzivnější programy **RF** a **Weekly** zařazujte 1–3× týdně podle potřeb a citlivosti vaší pleti.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhněte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

Radiofrekvence zahřívá hlubší vrstvy kůže, čímž stimuluje tvorbu kolagenu, ale krátkodobě může způsobit vazodilataci (rozšíření cév) a pocit tepla.

- zarudnutí (obvykle ustoupí do 1–24 hodin),
- pocit tepla nebo „horké pleti“,
- mírný otok,
- jemná citlivost.

1) Chladit, ale ne ledem přímo

- Použijte **chladivý gelový sáček** nebo **studený obklad** zabalený v látce
- Chladte přibližně 5 až 10 minut v intervalech
- Nepřikládejte led přímo na kůži – může to způsobit podráždění či poškození

2) Nanést zklidňující přípravky

Vhodné jsou:

- **aloe vera gel** (čistý, bez parfemace),
- **panthenol** (např. ve formě pěny nebo krému),
- **termální voda ve spreji**,
- produkty s **niacinamidem** (snižuje zarudnutí),
- lehké **hydratační krémy bez alkoholu a parfemace**.

Vyhněte se:

- aktivním látkám jako **retinol, AHA/BHA kyseliny, vitamín C**,
- parfémovaným nebo mastným krémům.

3) Vyhnout se teplu 24–48 hodin

To znamená:

- sauna
- solárium
- horké sprchy
- intenzivní sportování (zvýšení teploty a pocení prodlouží zarudnutí)
- přímé slunce

4) Neškrábat a nedráždit pokožku

- Nemačkejte, nedrhňte, nepoužívejte peelingy.
- Pletť ponechejte v klidu.

5) Použít SPF

- Pokud jdete ven, naneste **SPF 30–50**, i když je zataženo.
- Pletť je po radiofrekvenci citlivější na UV záření.
- Běžné reakce odezní během **několika hodin až jednoho dne**.
- Citlivé pleti to může být **až 48 hodin**.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE


- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme při programech **RF**, **Daily** a **Weekly** používat **čirý vodivý gel nebo sérum na vodní bázi**. Vodivý přípravek zajišťuje optimální přenos radiofrekvenční energie do pokožky, podporuje účinnost ošetření a umožňuje plynulý pohyb aplikační hlavice po pleti.
- Při ošetření větších oblastí obličeje, krku nebo dekoltu nanášejte vodivý gel postupně po jednotlivých partiích. Pokud gel během ošetření začne zasychat, doplňte jej podle potřeby, aby byl zachován dobrý kontakt hlavice s pokožkou.
- Jednotlivé programy jsou výrobcem přednastavené. Po zvolení programu přístroj automaticky aktivuje odpovídající kombinaci technologií, jako jsou radiofrekvenční ošetření (RF), LED fotonová terapie, vysokofrekvenční vibrace, zahřívání nebo chlazení. Jednotlivé technologie nelze zapínat ani vypínat samostatně.
- Program **Cleaning** je určen pro důkladné vyčištění pokožky a její přípravu na následnou kosmetickou péči. Pomáhá odstranit nečistoty z povrchu pleti a zlepšuje vstřebávání kosmetických přípravků.
- Program **Eyes** je optimalizován pro šetrné ošetření citlivé pokožky v okolí očí. Pomáhá podporovat mikrocirkulaci, zlepšuje vstřebávání oční kosmetiky a přispívá ke zmírnění otoků a jemných vrásek.
- Program **RF** využívá radiofrekvenční technologii k jemnému prohřívání hlubších vrstev pokožky. Podporuje tvorbu kolagenu a elastinu, zvyšuje pružnost pleti a napomáhá redukci jemných vrásek.
- Program **Cool** využívá aktivní chlazení aplikační hlavice a modré LED světlo ke zklidnění pokožky po kosmetickém ošetření. Pomáhá zmírnit zarudnutí, osvěžuje pleť a přispívá ke stažení póru.
- Program **Daily** je určen pro pravidelnou každodenní péči. Jemně stimuluje pokožku, podporuje vstřebávání účinných látek z kosmetických přípravků a pomáhá udržovat pleť hydratovanou, pružnou a svěží.

- Program **Weekly** poskytuje intenzivnější regenerační péči. Kombinuje několik technologií pro podporu obnovy pokožky, zvýšení její pevnosti a zlepšení celkového vzhledu pleti.
- Během jednoho ošetření můžete jednotlivé programy podle potřeby kombinovat. Doporučujeme začít programem **Cleaning**, pokračovat programem odpovídajícím aktuálním potřebám pleti (**Daily**, **RF**, **Eyes** nebo **Weekly**) a ošetření zakončit programem **Cool**, který pokožku zklidní.
- Aplikační hlavici udržujte po celou dobu v kontaktu s pokožkou a pohybujte s ní pomalu a plynule podle masážních linií. Nenechávejte hlavici na jednom místě déle než **2–3 sekundy**.
- Při prvním použití vždy zvolte **nejnižší úroveň intenzity**. Vyšší intenzitu nastavujte pouze tehdy, pokud je ošetření příjemné a pokožka na něj dobře reaguje.
- Během programu **RF** můžete cítit příjemné zahřívání pokožky. Jedná se o běžný projev správné funkce radiofrekvenční technologie.
- Pokud je ošetření nepříjemné i při nejnižší intenzitě, naneste větší množství vodivého gelu, zrychlete pohyb hlavice po pokožce nebo ošetření přerušte.
- Před ošetřením by měla být pokožka čistá, odlícená a suchá. Nepoužívejte přístroj na podrážděnou, poraněnou nebo zanícenou pokožku. Dobrý kontakt aplikační hlavice s pokožkou je důležitý pro správnou funkci všech technologií.
- LED fotonová terapie využívá neinvazivní světelné záření. Při běžném používání není nutné používat ochranné brýle. Nedoporučuje se však dívat se z bezprostřední blízkosti přímo do svítících LED diod po delší dobu.
- Po ukončení ošetření odstraňte zbytky vodivého gelu nebo kosmetického přípravku a aplikujte hydratační sérum nebo pleťový krém. Bezprostředně po ošetření může pokožka účinné látky lépe vstřebávat.
- Po dobu několika hodin po ošetření doporučujeme vyhnout se sauně, horké koupeli, intenzivnímu slunění nebo jiným činnostem, které mohou pokožku zbytečně zatěžovat.
- Pro dosažení nejlepších výsledků používejte přístroj pravidelně. Program **Daily** je vhodný pro každodenní péči, program **RF** doporučujeme používat 2–3× týdně a

program **Weekly** zařazujte přibližně 1–2× týdně. Důležitější než vysoká intenzita je pravidelnost ošetření.


- Po každém použití očistěte aplikační hlavici měkkým navlhčeným hadříkem nebo vhodným dezinfekčním prostředkem určeným pro kosmetické přístroje. Přístroj nikdy neponořujte do vody a před uložením jej vždy důkladně osušte.

MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ

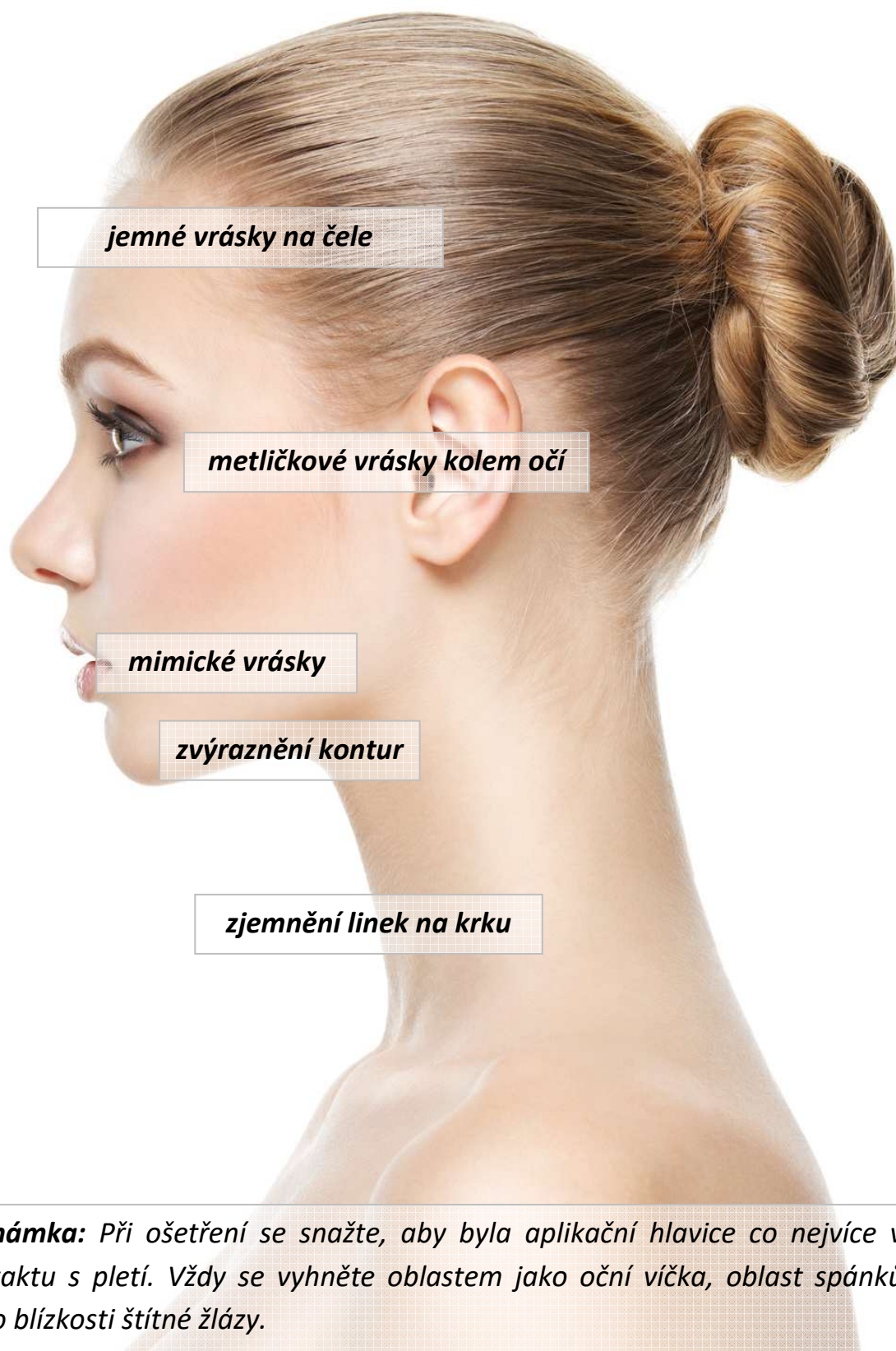

DOPORUČENÉ POHYBY PŘÍSTROJE

OBLAST TVÁŘE

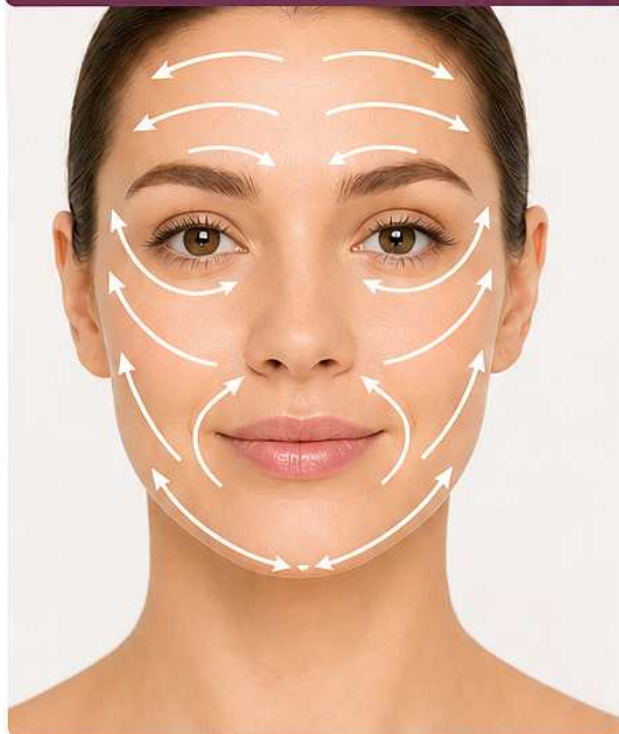

- 1 ČELO**
Od středu čela směrem do stran a vzhůru.
- 2 OČNÍ OKOLÍ**
Jemně od vnitřního koutku oka směrem ven a nahoru.
- 3 TVÁŘE**
Od nosu směrem do stran a vzhůru k spánkům.
- 4 OKOLÍ ÚST**
Od středu brady a rtů směrem do stran a vzhůru.
- 5 BRADA**
Od středu brady podél kontur čelisti směrem k uším.

OBLAST KRKU




- 1 PŘEDNÍ ČÁST KRKU**
Od spodní části krku směrem vzhůru k bradě.
Pohybujte přístrojem podél krku plynule a nikdy nezastavujte na jednom místě.
- 2 BOČNÍ ČÁST KRKU**
Od klíční kosti směrem vzhůru k linii čelisti a pod uši.

OBLAST DEKOLTU



- 1 STŘED DEKOLTU**
Od středu hrudní kosti směrem vzhůru k bradě.
- 2 STRANY DEKOLTU**
Od středu směrem do stran k ramenům a podél klíčních kostí.

MAPA CITLIVOSTI PLETI

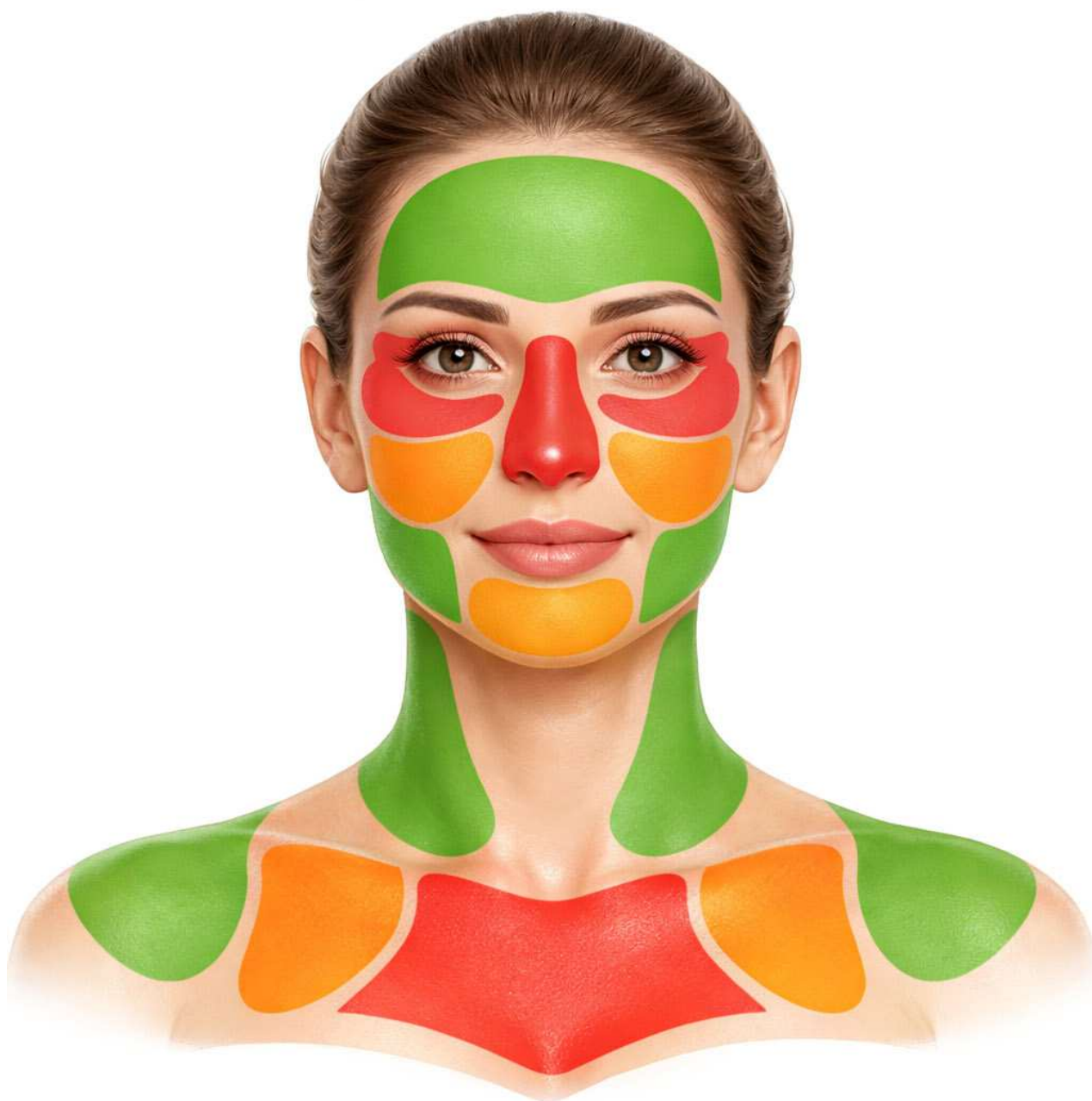

- NÍZKÁ CITLIVOST
- STŘEDNÍ CITLIVOST
- VYSOKÁ CITLIVOST

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Jak často mohu přístroj používat?

Frekvence používání závisí na zvoleném programu. Program **Daily** je určen pro každodenní péči. Programy **Cleaning** a **RF** doporučujeme používat 2–3× týdně, program **Weekly** přibližně 1–2× týdně. Intenzitu ošetření vždy přizpůsobte citlivosti své pokožky.

2. Kdy se dostaví první výsledky?

Pleť může působit jemnější, svěžejší a lépe hydratovaná již po několika ošetřeních. Viditelnější zlepšení pevnosti, pružnosti a redukce jemných vrásek lze očekávat při pravidelném používání během několika týdnů.

3. Musím používat vodivý gel?

Při programu **RF** doporučujeme používat čirý vodivý gel nebo sérum na vodní bázi. Zajišťuje optimální přenos radiofrekvenční energie a umožňuje plynulý pohyb aplikační hlavice po pokožce. U ostatních programů lze používat hydratační sérum nebo lehký kosmetický gel na vodní bázi.

4. Jaký gel je vhodný?

Používejte čirý vodivý gel na vodní bázi, například ultrazvukový kontaktní gel nebo kosmetický vodivý gel bez parfemace, olejů a silikonových složek. Vhodná jsou také lehká hydratační séra na vodní bázi.

5. Mohu použít běžný pleťový krém nebo olej?

Pro program **RF** nejsou hutné krémy ani pleťové oleje vhodné. Mohou zhoršit kontakt hlavice s pokožkou a snížit účinnost radiofrekvenčního ošetření. Pleťový krém doporučujeme aplikovat až po ukončení ošetření.

6. Je normální, že při ošetření cítím teplo?

Ano. Při programu **RF** je mírné zahřátí pokožky běžným projevem správné funkce radiofrekvenční technologie. Pocit tepla by měl být příjemný a neměl by způsobovat bolest ani pálení.

7. Je normální, že během ošetření cítím vibrace?

Ano. Jemné vibrace jsou součástí několika programů přístroje. Podporují mikromasáž pokožky, zlepšují mikrocirkulaci a napomáhají vstřebávání kosmetických přípravků.

8. Mohu používat přístroj každý den?

Ano, program **Daily** je navržen pro každodenní použití. Intenzivnější programy **RF** a **Weekly** používejte pouze podle doporučené frekvence, aby měla pokožka dostatek času na regeneraci.

9. Mohu během jednoho ošetření kombinovat více programů?

Ano. Jednotlivé programy můžete během jednoho ošetření libovolně kombinovat podle potřeb pleti. Doporučujeme začít programem **Cleaning**, pokračovat zvoleným ošetřovacím programem a péči zakončit programem **Cool**.

10. Mohu přístroj používat kolem očí?

Ano. Pro ošetření citlivého očního okolí používejte výhradně program **Eyes**. Hlavicí jemně přejíždějte po kostěném okraji očního okolí a nikdy ji nepřikládejte přímo na oční víčka ani na oční bulvu.

11. Mohu přístroj používat na krk a dekolt?

Ano. Přístroj je vhodný také pro ošetření krku a dekoltu. Doporučujeme použít program **RF**, **Daily** nebo **Weekly** a hlavicí přejíždět pomalými tahy směrem vzhůru.

12. Jak dlouho má trvat jedno ošetření?

Kompletní ošetření obličeje obvykle trvá **10 až 15 minut**. Pokud ošetřujete také krk a dekolt nebo kombinujete více programů, může péče trvat až **20 minut**.

13. Co mám udělat po ošetření?

Odstraňte zbytky vodivého gelu nebo kosmetického přípravku, pleť jemně osušte a aplikujte hydratační sérum nebo pleťový krém. Po ošetření bývá pokožka připravena lépe vstřebávat aktivní látky z kosmetiky.

14. Mohu po ošetření na slunce?

Po ošetření doporučujeme několik hodin nevystavovat pokožku intenzivnímu slunečnímu záření. Pokud se pohybujete venku, používejte ochranný krém s odpovídajícím UV filtrem.

15. Jak mám přístroj čistit?

Po každém použití očistěte aplikační hlavici měkkým navlhčeným hadříkem nebo vhodným dezinfekčním prostředkem určeným pro kosmetické přístroje. Přístroj nikdy neponořujte do vody a před uložením jej vždy důkladně osušte.

16. Mohu přístroj používat během nabíjení?

Ne. Přístroj nepoužívejte během nabíjení. Před každým ošetřením jej odpojte od nabíječky.

17. Je LED světlo bezpečné pro oči?

Ano. LED fotonová terapie využívá neinvazivní světelné záření a při běžném používání není nutné používat ochranné brýle. Nedoporučuje se však dívat se z bezprostřední blízkosti přímo do svítících LED diod po delší dobu.

18. Co dělat, pokud je ošetření nepříjemné?

Snižte intenzitu ošetření, naneste větší množství vodivého gelu nebo zpomalte či zrychlete pohyb hlavičky podle potřeby. Pokud nepříjemné pocity přetrvávají, ošetření přerušete a před dalším použitím zkontrolujte, zda přístroj používáte podle pokynů v návodu.

19. Mohou přístroj používat více členové domácnosti?

Ano. Z hygienických důvodů doporučujeme po každém použití důkladně očistit a případně dezinfikovat aplikační hlavici.

20. Je přístroj vhodný pro všechny typy pleti?

Přístroj je vhodný pro většinu typů pleti. Nepoužívejte jej na poraněnou, zanícenou nebo jinak poškozenou pokožku ani v případě kontraindikací uvedených v tomto návodu. Pokud trpíte kožním onemocněním nebo si nejste vhodností použití jisti, poraďte se před zahájením ošetření s lékařem nebo dermatologem.

NABÍJENÍ BATERIE

Kosmetický přístroj **BeautyRelax Rlift Elegance** je vybaven vestavěným dobíjecím lithium-iontovým akumulátorem s kapacitou **2000 mAh**, který umožňuje pohodlné bezdrátové používání. Přístroj se nabíjí prostřednictvím dodané magnetické nabíjecí základny. Před prvním použitím doporučujeme akumulátor plně nabít, aby bylo dosaženo jeho maximální kapacity a optimálního výkonu.

Postup nabíjení

1. Připojte USB-C kabel k nabíjecí základně.
2. Druhý konec kabelu připojte k síťovému USB adaptéru s výstupem **5 V DC** nebo k jinému vhodnému USB zdroji napájení.
3. Umístěte přístroj do nabíjecí základny tak, aby došlo ke správnému spojení nabíjecích kontaktů.
4. Po správném připojení se rozsvítí indikátor nabíjení, který signalizuje zahájení nabíjení akumulátoru.
5. Po úplném nabití se stav nabíjení změní podle signalizace přístroje (například změnou barvy kontrolky nebo jejím zhasnutím).
6. Po dokončení nabíjení vyjměte přístroj z nabíjecí základny a odpojte napájecí adaptér od elektrické sítě.

Plné nabití akumulátoru se může lišit v závislosti na stavu nabití a kondici akumulátoru.

Doporučení pro dlouhou životnost akumulátoru

- Přístroj nabíjejte při okolní teplotě **10 až 35 °C**.
- Používejte pouze dodanou nabíjecí základnu, USB-C kabel a vhodný napájecí adaptér s výstupním napětím **5 V DC**.
- Přístroj nepoužívejte během nabíjení.
- Nenechávejte akumulátor dlouhodobě zcela vybitý.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, uložte jej s akumulátorem nabitým přibližně na **50–80 %** a přibližně jednou za tři měsíce jej krátce dobijte.
- Po úplném nabití doporučujeme přístroj vyjmout z nabíjecí základny. Přestože je akumulátor chráněn proti přebití, tento postup přispívá k jeho dlouhodobé životnosti.
- Přístroj nevystavujte vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření ani mrazu.

Dodržováním těchto doporučení zajistíte spolehlivý provoz přístroje, maximální využití kapacity akumulátoru a jeho dlouhou životnost.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Správná péče o přístroj je důležitou součástí jeho bezpečného používání a přispívá k zachování jeho optimálního výkonu, dlouhé životnosti a hygienického provozu. Pravidelné čištění ošetřovací hlavičky zabraňuje usazování zbytků kosmetických přípravků, kožního mazu a dalších nečistot, které by mohly ovlivnit účinnost ošetření.

Čištění po každém použití

1. Po ukončení ošetření přístroj vždy vypněte a odpojte od nabíjecí základny.
2. Ošetřovací hlavičku jemně otřete měkkým hadříkem nebo kosmetickým tamponem navlhčeným čistou vodou. V případě potřeby lze použít malé množství jemného neagresivního čisticího prostředku nebo dezinfekčního přípravku určeného pro kosmetické přístroje.
3. Poté hlavičku osušte čistým, měkkým hadříkem bez vláken.
4. Před uložením se ujistěte, že je přístroj zcela suchý.

Pravidelná údržba

- Pravidelně kontrolujte čistotu ošetřovací hlavičky i nabíjecích kontaktů.
- V případě znečištění nabíjecích kontaktů je očistěte suchým bavlněným tamponem.
- Přístroj skladujte na čistém, suchém místě mimo přímé sluneční záření, vysokou vlhkost a zdroje tepla.
- Pro zachování maximální životnosti akumulátoru doporučujeme přístroj pravidelně dobíjet a nenechávat jej dlouhodobě zcela vybitý.

Důležitá upozornění

- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- K čištění nepoužívejte abrazivní houbičky, drátěnky ani čisticí prostředky obsahující aceton, alkohol ve vysoké koncentraci, rozpouštědla nebo jiné agresivní chemikálie.
- Nečistěte přístroj pod tekoucí vodou, pokud není výrobcem výslovně uvedeno, že je voděodolný.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani opravovat svépomocí. V případě závady kontaktujte autorizovaný servis nebo svého prodejce.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučuje se jej uložit plně nabitý a přibližně jednou za tři měsíce akumulátor dobít.

Pravidelná údržba a šetrné zacházení zajistí spolehlivý provoz přístroje, zachování jeho maximální účinnosti i hygienických vlastností. Dobře udržovaný přístroj poskytuje konzistentní výsledky ošetření a přispívá k bezpečné a komfortní péči o pleť po mnoho let.

PÁR VĚT ZÁVĚREM

Tento kosmetický přístroj představuje vyspělý prostředek pro moderní domácí péči o pleť a svými funkcemi se přibližuje technologiím využívaným v profesionálních kosmetických studiích. Kombinace několika ošetřovacích režimů umožňuje komplexní péči zaměřenou na zlepšení kvality pokožky, podporu její přirozené regenerace a zvýšení účinnosti běžně používaných kosmetických přípravků. Díky ergonomickému designu, jednoduchému ovládání a možnosti nastavení intenzity je vhodný jak pro začínající uživatele, tak pro ty, kteří mají s kosmetickými technologiemi již zkušenosti.

Z odborného hlediska lze tento přístroj hodnotit jako velmi kvalitního pomocníka pro pravidelnou domácí péči. Při systematickém používání podporuje lepší mikrocirkulaci pokožky, přispívá ke zvýšení elasticity pleti, zlepšuje její hydrataci a napomáhá efektivnějšímu vstřebávání aktivních látek obsažených v kosmetických sérech a krémech. Výsledkem může být viditelně svěžejší, pevnější a sjednocenější vzhled pleti s redukcí známek únavy i prvních projevů stárnutí.

Velkou předností přístroje je možnost zařadit profesionálně inspirovanou péči do každodenní kosmetické rutiny bez nutnosti častých návštěv kosmetických salonů. Pravidelné ošetření přispívá k dlouhodobému udržení zdravého vzhledu pokožky a podporuje přirozenou tvorbu kolagenu a elastinu, které jsou klíčové pro pevnost a pružnost pleti. Při kombinaci s kvalitní kosmetikou lze dosáhnout výsledků, které jsou při dlouhodobém používání dobře patrné.

Pro dosažení maximálního efektu doporučujeme dodržovat doporučenou frekvenci používání a přizpůsobit jednotlivé režimy aktuálním potřebám pokožky. Právě pravidelnost je rozhodujícím faktorem pro dosažení dlouhodobých a viditelných výsledků.

Celkově lze tento přístroj hodnotit jako promyšlené, bezpečné a technologicky pokročilé zařízení, které nabízí vysokou užitnou hodnotu. Představuje výbornou investici pro každého, kdo chce aktivně pečovat o svou pleť, podpořit její přirozenou vitalitu a dopřát si kvalitní kosmetickou péči v pohodlí domova. Při správném používání se může stát nepostradatelnou součástí každodenní beauty rutiny a významně přispět k dlouhodobě mladistvému, zdravému a zářivému vzhledu pokožky.

Martin Hrbek

odborný konzultant a školitel pro značku BeautyRelax

shop.beautyrelax.cz | email: mh@santadria.cz | tel: (+420) 737 196 160 BeautyRelax

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz



737 196 160

mh@santadria.cz

shop.beautyrelax.cz

www.beautyrelax.cz

facebook.com/BeautyRelaxEquipment



Martin Hrbek
odborný konzultant

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

SANTADRIA s.r.o. Mojmírovo nám. 75/2 Brno 61200 Brno 61200 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj na vrásky Rlift Elegance

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-3067**

EAN: **8594166123663**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN55014-2:2015

Přístroj slouží ke kosmetické péči o pleť. Přístroj není zdravotnický prostředek.

Technologie přístroje slouží pro neinvazivní aplikaci na pleť. Žádná z částí aplikační hlavice není schopna narušit integritu pleti. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění.

V případě používání více osobami je třeba dbát zvýšenou pozornost s hygienickými normami pro přístroje obdobného typu.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.2.2026