

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-2660

THERMAGE EGG HYDRO



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
ÚČEL POUŽITÍ	6
RADIOFREKVENCE	7
VIBRACE	7
FOTONOVÉ SVĚTLO	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	9
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU	10
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	12
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	13
MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ	14
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	15
NABÍJENÍ BATERIE	16
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	16
OBSAH BALENÍ	16
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	17
CERTIFIKACE	17
DOVOZCE	17

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenesí distributor odpovědnost.



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (platí v místech použití přístroje)
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka



HLAVNÍ VÝHODY

- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- Příznivý vliv na elastická vlákna
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- Unikátní zásobník na kosmetický přípravek pro průběžné dávkování a penetraci
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni brání v tvorbě pigmentu
- Zásobník na kosmetický přípravek s kapacitou 3ml
- Radiofrekvence: 1MHz
- Fotonová terapie: červené, modré a zelené světlo
- Aplikační hlavice s nerez oceli
- Ochrana proti vodě: IPX4 standard
- Nabíjecí napětí: DC 5V 500mA
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie: 600mAh
- Provozní napětí: DC 7,4V
- Výkon: 3W
- Rozměry: 9×7,6×5,2cm
- Hmotnost: 168g

ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax ThermageEgg Hydro je kosmetický přístroj pro neinvazivní omlazení pleti. Profesionální přístroj pro vysoce účinné pleťové ošetření. Radiofrekvence a 3 barvy fotonové terapie. Zásobník na kosmetický přípravek pro dokonalé zapracování do pleti. Přímé zacílení pro stimulaci kolagenních a elastických vláken. Zvýšení pružnosti pleti. Praktická nabíjecí stanice. Multifunkční aplikační hlavice.


RADIOFREKVENCE

Aplikační hlavice generuje energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.



VIBRACE

Správná funkce lymfatického systému platí nejen pro tělesné končetiny, ale také pro náš obličej. Pokud máme lymfu a krevní oběh v pořádku, odvod nečistot z krve probíhá násobně lepším způsobem. Zlepšení krevního oběhu = stimulace lymfatického systému = lepší odvod nečistot a škodlivin z těla = krásná a zdravá pleť. Jednoduchá rovnice, která platí nejen pro obličej, ale pro celé naše tělo. Jemná vibrační masáž patří z technologického hlediska mezi nejjednodušší, ale zároveň velmi účinnou techniku ošetření pleti.

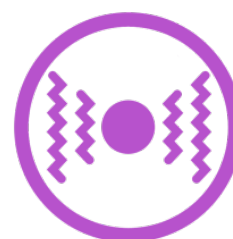

FOTONOVÉ SVĚTLO


Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni. Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2650 THERMAGE EGG nabízí funkci červeného světla s vlnovou délkou 620nm.



Reálný pozitivní přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni


- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

POPIS PŘÍSTROJE

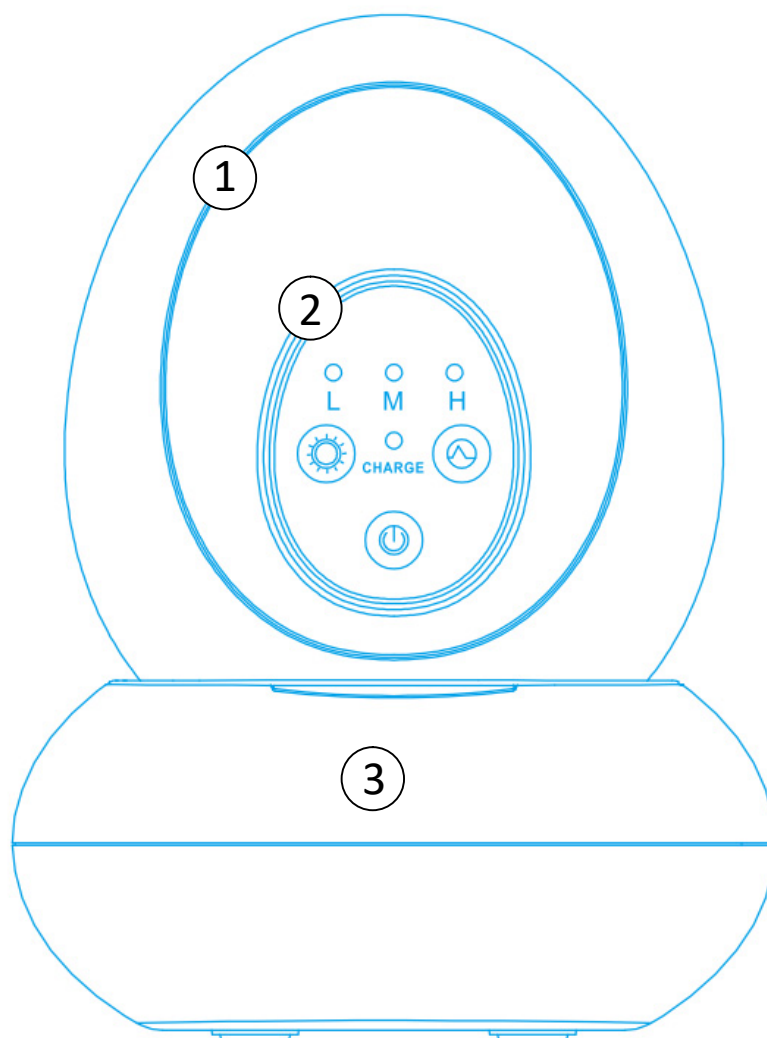

1. Tělo přístroje
2. Ovládací panel
3. Nabíjecí stojánek

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

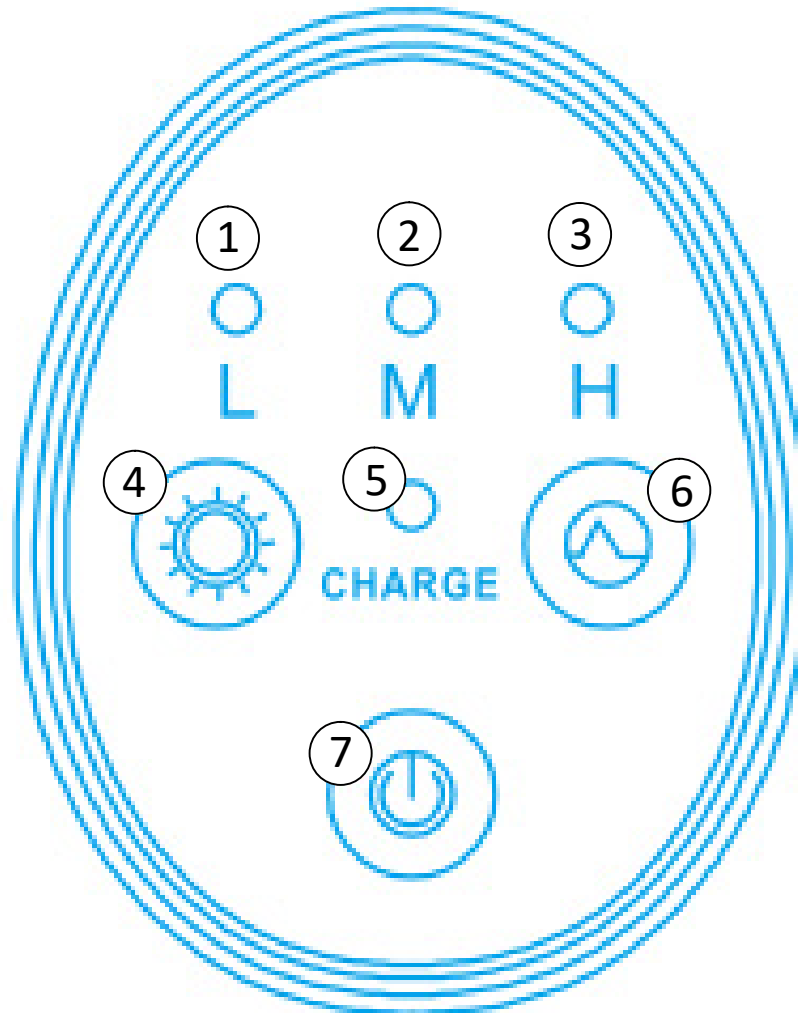


1. Indikátor nízká úroveň intenzity
2. Indikátor střední úroveň intenzity
3. Indikátor vysoká úroveň intenzity
4. Tlačítko **FOTONOVÁ TERAPIE**
5. Indikace nabíjení
6. Tlačítko **MODE**


NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Kosmetický přístroj má unikátní konstrukci. Ve středu aplikační hlavice je integrovaný zásobník na kosmetický přípravek v tekuté podobě. Zásobník má speciální membránovou krytku, která zajišťuje plynulé dávkování přípravku na pleť. Při pohybu přístrojem po pleť se přípravek samovolně uvolňuje na pleť a kontaktní plocha aplikační hlavice zajistí jeho intenzivní zpracování. Se zásobníkem pracujte následovně:

Pomocí prstu odloupněte krytku zásobníku. Může vám pomoci nehet, kterým krytku od jeho okraje vytlačíte směrem ven.

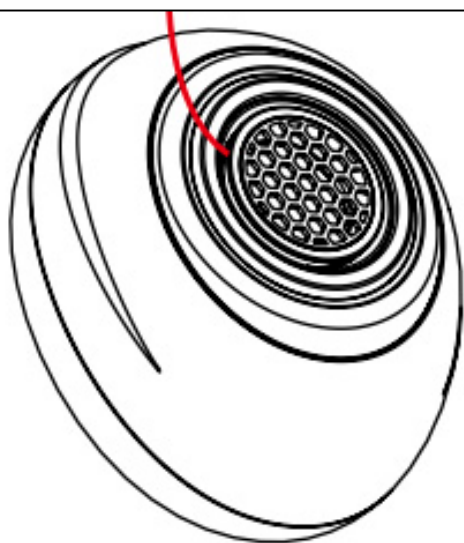

Jakmile je krytka odstraněna, můžete tekutinou naplnit zásobník. Kapacita je přizpůsobena na objem 3ml tekutiny.

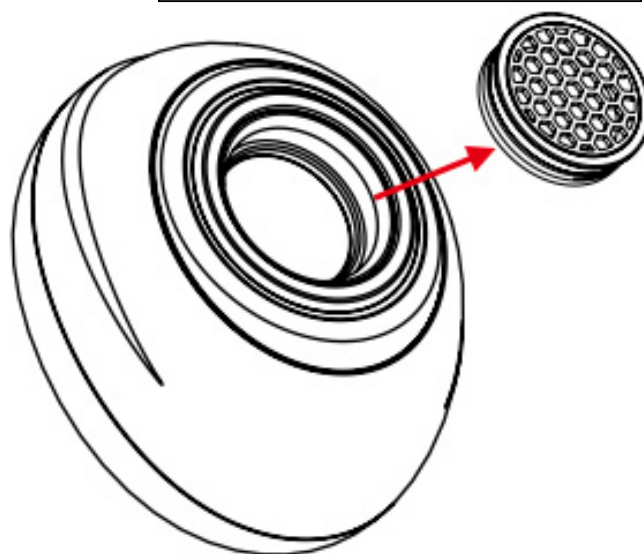

Ukazatel maximální úrovně hladiny tekutiny

Zásobník na tekutinu

Tělo přístroje




K naplnění zásobníku můžete použít kapátko, které je součástí balení




NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Vraťte zpět kryt zásobníku. Ideálně pod úhlem 45°

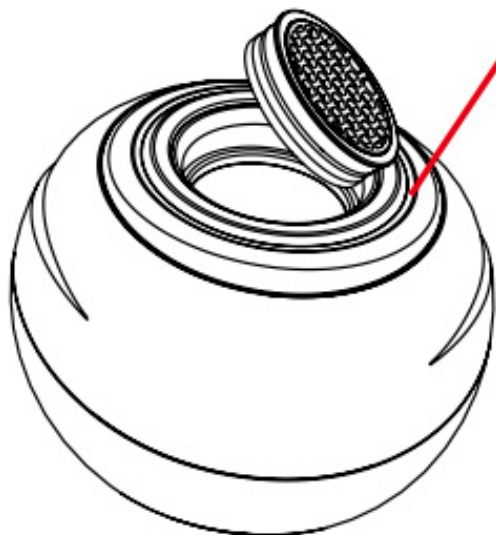

Zkontrolujte, že je kryt zásobníku umístěn nadoraz.

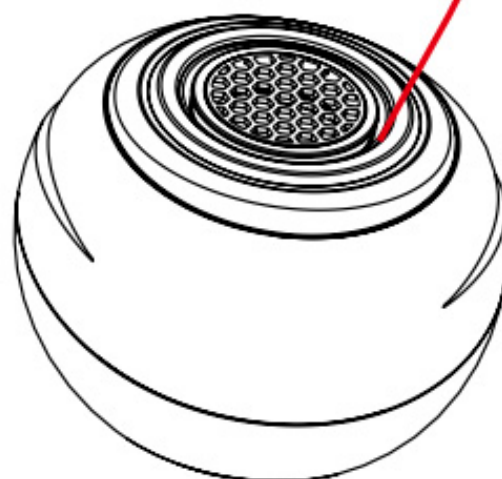


OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Před každým použitím je třeba důkladně omýt pokožku. Ideální je načasovat si ošetření po koupeli. Na pleť by se neměl nacházet makeup, nečistoty ani jakékoliv kosmetické přípravky. Pleť by měla být dokonale suchá.
- 2.** Zásobník přístroje naplňte kosmetickým přípravkem. Přípravek musí být na tekuté bázi. Jedině tak je možné jeho plynulé dávkování na povrch pleti v průběhu použití přístroje.
- 3.** Stiskněte krátce tlačítko **ON/OFF**. Přístroj se zapne. Automaticky se spustí režim působení radiofrekvence. Aktivuje se červené světlo fotonové terapie. Intenzita radiofrekvence je na nejnižší úrovni.
- 4.** Pomocí tlačítka **MODE** si můžete nastavit úroveň výkonu radiofrekvence. K dispozici jsem celkem tři úrovně: nízká, střední, vysoká. Každou úroveň signalizuje červený indikátor L – nízká, M - střední, H - vysoká. Čtvrtým stiskem tlačítka **MODE** aktivujete režim vibrací. Pátým stiskem tlačítka **MODE** vibrace vypnete.
- 5.** Pomocí tlačítka **FOTONOVÉ SVĚTLO** si můžete přepínat mezi jednotlivými barvami světla: červená, zelená, modrá, vypnuto.
- 6.** Stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.
- 7.** Návod jak se pohybovat aplikátorem po pleťi naleznete v pasáži tohoto návodu:
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU.
- 8.** Návod jak správně nabít baterii přístroje naleznete v pasáži tohoto návodu:
NABÍJENÍ BATERIE.
- 9.** Návod jak správně pečovat o aplikátor naleznete v pasáži tohoto návodu:
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Pokud se rozhodnete použít kosmetický přípravek na tuhé bázi – krém, gel, sérum, atd. přípravek aplikujte přímo na pleť a pomocí aplikační hlavice zpracujte.
- 2.** Intenzitu výkonu si můžete nastavit pouze pro radiofrekvenci. K dispozici jsou celkem tři úrovně – nízká, střední, vysoká. Intenzitu působení vibrací měnit nelze.
- 3.** Při pohybu aplikační hlavice se snažte mít celou plochu v plném kontaktu s pleť. Pokud se vám to nepodaří, nic se neděje. Pleť ošetřete pouze těmi kontaktními plochami, které vám tvar obličeje umožní.
- 4.** Při aktivní funkci červeného fotonového světla není třeba používat žádné ochranné brýle. Žádný problém nepředstavuje ani ošetření pleti v očním okolí. Přesto bychom vám doporučili, abyste se vyhnuli přímému a dlouhému pohledu do zdroje světla. Váš zrak nebude žádným způsobem trvale poškozen, ale sledování zdroje světla po delší dobu není pro vaše oči příjemné.
- 5.** Během jednoho ošetření pleti můžete jednotlivé programy (RF a vibrace) postupně kombinovat. Doporučujeme zaměřit se na nejvíce problematické oblasti (jemné vrásky na čele, metličkové vrásky kolem očí, mimické vrásky, zvýraznění kontur, zjemnění linek na krku, atd.)
- 6. Tip:** Ošetřená partie by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Radiofrekvence bude mít lepší možnost se na pleť navázat.
- 7. Doporučení:** Ošetřenou pleť nevystavujte v délce minimálně 3 dnů příliš horké vodě. Pokuste se vyhnout návštěvě sauny. Pokožka prochází po ošetření stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit.
- 8.** Během jednoho ošetření pleti můžete jednotlivé úrovně intenzity radiofrekvence střídat.
- 9.** Po skončení používání přístroje pleť otřete aplikační hlavici od kosmetického přípravku. Nespotřebovaný tekutý přípravek nenechávejte v zásobníku. Krytku zásobníku můžete vyjmout a propláchnout pod proudem vody.

MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ

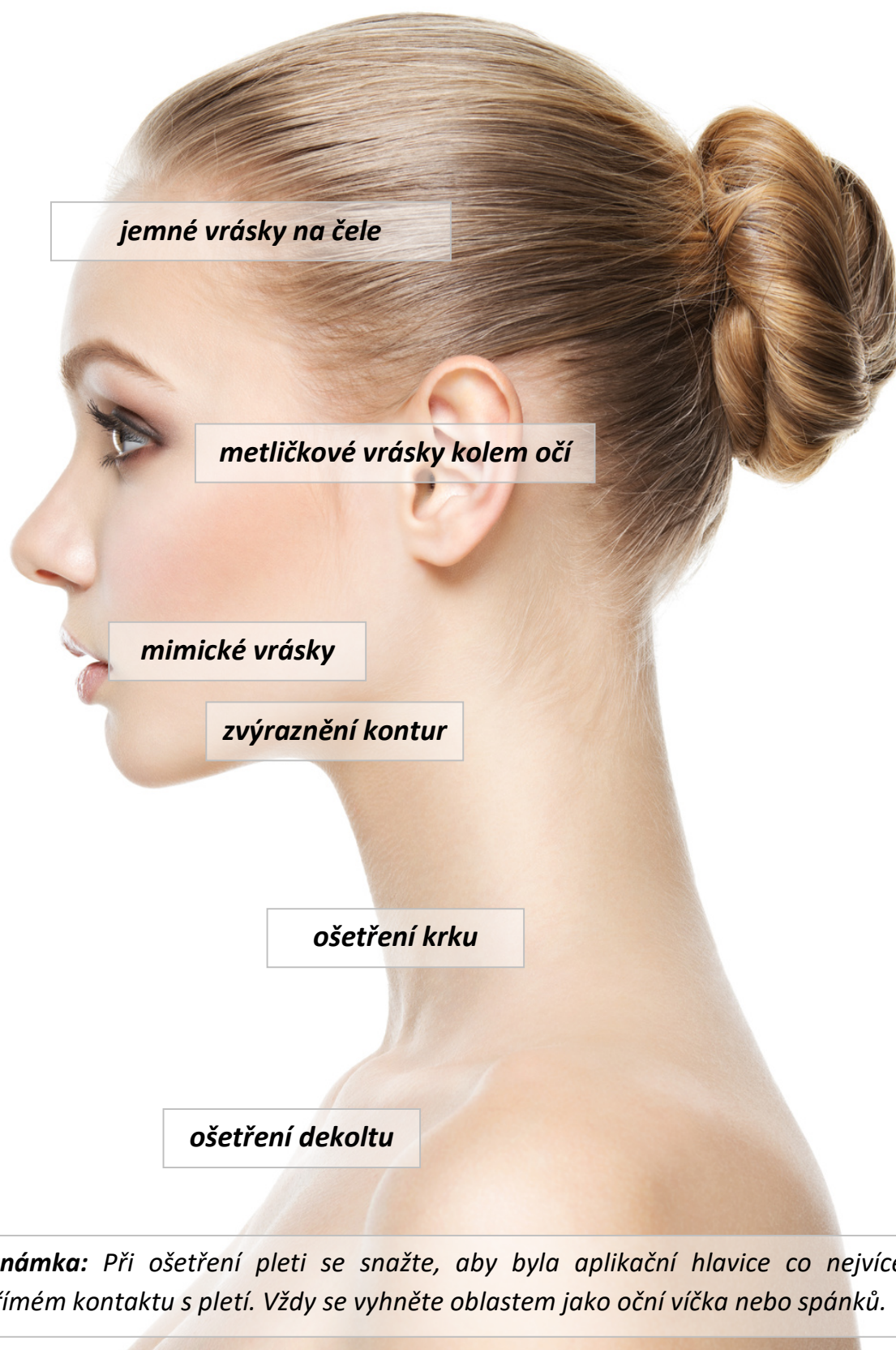

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

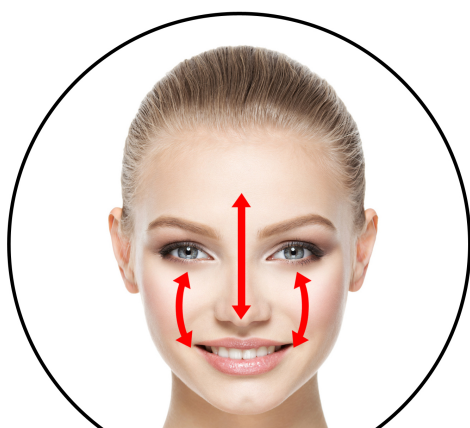

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí li-ion baterií.

Upozornění: K nabíjení používejte výhradně nabíjecí adaptér, který je součástí balení.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně napájecí adaptér, který je součástí balení.
2. Adaptér připojte k nabíjecímu stojánu.
3. Druhý konec adaptéru zapojte do zásuvky.
4. Průběh nabíjení signalizuje červená světelná signalizace CHARGE.
5. Jakmile je proces nabíjení dokončen, rozsvítí se zelená světelná signalizace CHARGE.
6. Čas nabíjení se může lišit v závislosti na stavu baterie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu kontaktní plochy hlavice.

OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BR-2660 THERMAGE EGG HYDRO
- Nabíjecí stojánek
- Adaptér
- Hadřík
- Kapátko
- Návod k obsluze

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.