



# NÁVOD K OBSLUZE

Obličejová maska **Beautyrelax BR-3083**

## LIGHTMASK PROFESSIONAL

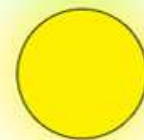

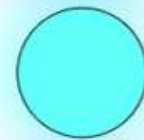

## OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	5
OBSAH BALENÍ	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
HLAVNÍ BENEFITY	6
TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM	6
BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE	6
POPIS OVLADAČE	8
POPIS MASKY	9
POUŽITÍ DLE TYPU PLETI	10
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	12
CERTIFIKACE	12
EU DISTRIBUTOR	12
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	13

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



## KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Psychické onemocnění
- Stavy úzkosti
- Deprese
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



## OBSAH BALENÍ

- 1x Obličejová maska Beautyrelax BR-3083
- 1x Nabíjecí adaptér
- 1x Ovladač
- 1x Ochranné textilní brýle
- 7x Aplikační hlavice pro stimulaci elektrickými pulzy
- 1x Návod k obsluze

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Časovač: ano, až 91minut
- Nabíjení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry: 25x25x17cm
- Hmotnost: 1,3kg

## **PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE**

Terapie fotonovým světlem je v oblasti kosmetického ošetření velmi populární. Ošetření fotonovým světlem nebolí a má velmi dobré výsledky. Kosmetický přístroj s fotonovou terapií BeautyRelax Lightmask Professional poskytuje fotonovou terapii s pokrytím celého obličeje a krku. Během používání je maximálně chráněn váš zrak. Obličejová maska slibuje vysoce komfortní použití ve srovnání s ručními přístroji. Přístroj nemusíte držet v ruce a zároveň světlo pokrývá rovnoměrně celou plochu obličeje. Stálost působení fotonovým světlem je pro úspěšné dosažení výsledků klíčové. Model professional je navíc vybaven funkcí působení EMS pulzů, které přenáší elektrické pulzy do pleti prostřednictvím 7 aplikačních hlavic. Napomáhají posílit obličejové svaly a celkově zpevnit kontury obličeje.

## **HLAVNÍ BENEFITY**

- Rovnoměrné pokrytí obličeje světelnými pásky
- Během použití můžete snadno sledovat např. televizi
- Nízká hmotnost masky nepředstavuje velkou zátěž pro hlavu

## **TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM**

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.



## **REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI**

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

## **BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE**

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

## 1. Červené světlo

Stimuluje podporu tvorby kolagenu. Kolagen je základní bílkovina, která slouží k obnově poškozených a starých tkání. Zlepšení kvality pleti a zmenšení pórů.

## 2. Modré světlo

Bakterie v akné obsahují porfyriny. Díky vysoké afinitě s vlnovou délkou je modré světlo schopno porfyriny ničit. Kromě toho má modré světlo zklidňující účinek, který je velmi účinný při přecitlivělosti pleti.

## 3. Fialové světlo

Kombinuje červené a modré světlo, které má dvě účinné fototerapie. Zejména má dobrý účinek na potlačení příznaků akné.

## 4. Žluté světlo

Má speciální vlnovou délku 590nm. Podporuje absorbování kosmetických přípravků. Přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu. Zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti. Obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu. Napomáhá zpomalovat stárnutí kůže.

## 5. Zelené světlo

Zelené světlo napomáhá vyrovnat barevný pigment a redukovat jemné vrásky. Urychluje proces hojení ran. Zesvětluje pleť.

## 6. Azurové světlo

Zvyšuje buněčnou energii a má příznivé účinky pro celkový metabolismus kožní tkáně.

## 7. Laserové světlo

Dokáže proniknout hluboko do pokožky. Urychluje metabolismus tkání. Rozkládá barevné skvrny. Zlepšuje vzhled jemných vrásek a stárnutí pleti.


## POPIS OVLADAČE



1. Displej
2. Snížení výkonu elektrických pulzů
3. Zvýšení výkonu elektrických pulzů
4. Režim působení světla
5. Start/výběr světla fotonové terapie
6. Snížení času
7. Zvýšení času
8. Nastavení intenzity světla
9. Napájení masky
10. Napájení masky
11. Vstup pro napájecí adaptér



## POPIS MASKY

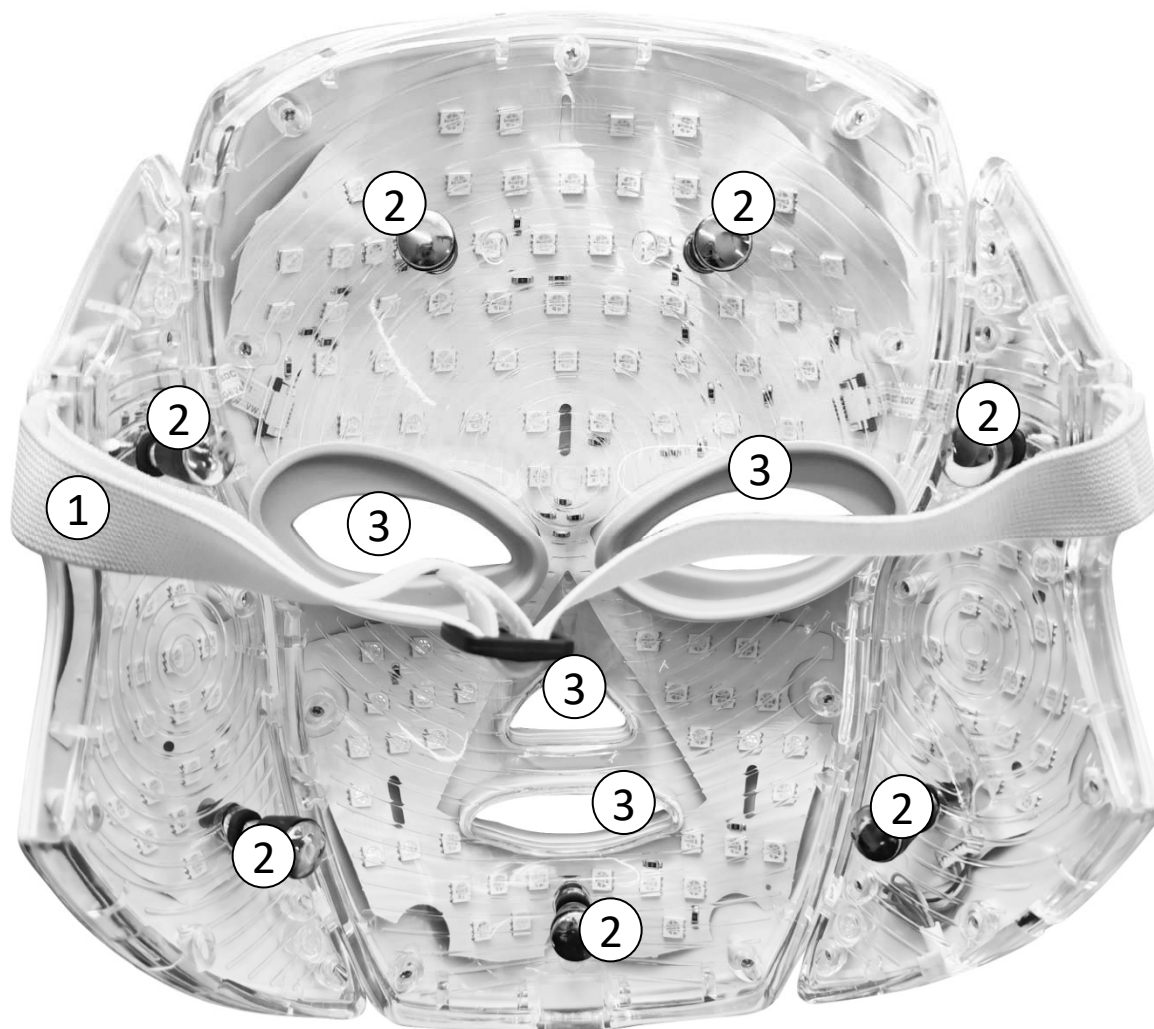

1. Stahovací pásek
2. Aplikační hlavice elektrických pulzů
3. Otvory pro oči, nos a ústa

## POUŽITÍ DLE TYPU PLETI

Šetrnost ošetření fotonové terapie umožňuje ošetření všech typů pleti.



normální



suchá



smíšená



mastná



citlivá



aknézní

## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Před použitím doporučujeme pleť odlíčit od makeupu. Pleť důkladně omyjte a osušte.
- 2.** V případě potřeby můžete nanést váš oblíbený kosmetický krém nebo sérum.
- 3.** Přístroj si nasadte na hlavu tak, aby vám to bylo pohodlné. V případě potřeby můžete k masce připojit druhou část pro oblast obličeje.
- 4.** Pokud to situace vyžaduje, můžete oblast očí překrýt kosmetickými tampónky nebo ubrousky. Nebo použijte textilní brýle, které jsou součástí balení. Budete tak mít během používání masky maximální komfort.
- 5.** V případě využití funkce působení elektrických pulzů instalujte do vnitřní strany masky aplikační kolíčky - 7ks. **Pokud by pro vás byla aplikace kolíčků nekomfortní, do masky je neinstalujte.**
- 6.** Masku pro obličej a krk připojte k ovladači. Pořadí není důležité. Můžete libovolně připojit do zdířky (9), (10).
- 7.** Ovladač připojte k napájecímu adaptéru. Využijte zdířku (11) na horní straně ovladače.
- 8.** Přístroj zapnete pomocí tlačítka **ColorSelect/Start (5)**. Dalším stiskem tohoto tlačítka si můžete nastavit barvu fotonového světla.
- 9.** Pomocí tlačítka **Flicker (4)** si můžete nastavit režim působení světelné terapie. Doporučujeme používat mód 1 - stálé kontinuální svícení. Režim blikání světla může působit nepříjemné pocity lidem, kteří jsou více citliví na světlo a trpí např. epilepsií.
- 10.** Pomocí tlačítek Time **(6)(7)** si můžete nastavit čas ošetření. K dispozici je rozsah od 1 do 91 minut.
- 11.** Pomocí tlačítek **Microelectronics(2)(3)** si můžete nastavit intenzitu působení elektrických pulzů. K dispozici je celkem 9 úrovní intenzity výkonu.
- 12.** Pomocí tlačítka **Brightness** si můžete nastavit intenzitu působení světla. K dispozici je celkem 9 intenzit.
- 13.** Průměrná délka použití masky se pohybuje od 15 do 30 minut.
- 14.** **V případě potřeby si na obě oči nasadte klasické oválné odličovací tampónky nebo textilní brýle. Použití masky tak pro vás bude maximálně komfortní. I přes zavřené oči nebudete vnímat žádnou míru světla, ale budete mít pouze tmou.**
- 15.** Po skončení použití přístroje jej vypněte vytažením adaptéru z ovladače nebo zásuvky.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrch přístroje udržujte čistý. Zejména pak plochu, kde jsou umístěny světelné pásy. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě žádné ostré předměty, které by mohly poškodit povrch přístroje.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a

napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## EU DISTRIBUTOR

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

## **Obličejová maska LIGHTMASK PROFESSIONAL**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-3083**

EAN: **8594166123830**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN 55014-1:2017 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019**  
**EN 55014-2:2015 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010**  
**EN 61000-4-4: 2012 EN 61000-4-5: 2014+A1:2017**  
**EN 61000-4-6:2014/AC:2015, EN 61000-4-11:2004+A1:2017**

**Přístroj není zdravotnický prostředek.** Jedná se o kosmetickou pomůcku.

Žádná z technologií přístroje není schopna narušit integritu pleti.

Slouží pro kosmetickou aplikaci na pleť.

Není určen k léčbě žádného kožního onemocnění.

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.4.2022