

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj BeautyRelax BR-2915

SHIATSU 5D ULTIMATE



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
POPIS PŘÍSTROJE	6
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	7
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	8
JE DOBRÉ VĚDĚT	9
MOŽNOSTI POUŽITÍ	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	11
CERTIFIKACE	11
DOVOZCE	11
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	12

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Je striktně ZAKÁZÁNO používat masážní přístroj během jízdy v automobilu. V případě nehody se vystavujete riziku poranění páteře nebo jiné oblasti, která by byla masážním přístrojem masírována.

OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj BeautyRelax BR-2915 SHIATSU 5D ULTIMATE
- Nabíjecí adaptér 220V
- Návod k obsluze

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Operace tělesné partie, pro kterou je přístroj určen
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Srdeční onemocnění, hypertenze
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Krční masážní přístroj poskytuje příjemnou uvolňující shiatsu 5D masáž krční páteře. Unikátní masážní mechanismus, který nemá u přístrojů obdobného typu srovnání. Masážní mechanismus disponuje optimálním tvarem a směry pohybu, který je naprosto unikátní. Dokonalý zážitek z masáže. Pokud zavřete oči, nepoznáte rozdíl ve srovnání s profesionálním masérem. Infračervené vyhřívání proniká hluboko do svalové tkáně a výrazně zlepšuje krevní oběh. Všechny funkce se snadno ovládají pomocí dotykového panelu. Možnost nastavení rychlosti masáže. Kvalitní a skutečně účinná masáž.

HLAVNÍ VÝHODY

- Účinné zmírnění svalového napětí a ztuhlosti.
- Skvělý nástroj pro sportovce na regeneraci svalů.
- Napomáhá odstranit příznaky únavy a vyčerpání.
- Příjemná relaxace po náročném pracovním dni.
- Univerzální použití na více částí těla: krk, ramena, záda, pas nebo stehna.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Spotřeba: 24W.
- Vyhřívání: Ano.
- Hmotnost: 1,4kg.
- Rozměry: 53×33×12cm.

POPIS PŘÍSTROJE



- 1. Pohyblivý masážní mechanismus
- 2. Ovládací panel
- 3. Madlo pro ruce

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



1. Světelný indikátor vyhřívání
2. Tlačítko VYHŘÍVÁNÍ
3. Tlačítko RYCHLOSTI pohybu masážních hlavic
4. Tlačítko ZMĚNY POHYBU SMĚRU masážních hlavic
5. Tlačítko ON/OFF
6. Světelný indikátor činnosti přístroje

POUŽITÍ PŘÍSTROJE


1. Přístroj připojte k napájecímu adaptéru, který je součástí balení.
2. Vždy se snažte, aby nebyl v průběhu použití kabel příliš napnutý. Pokud to situace vyžaduje, použijte prodlužovací šňůru (není součástí balení), aby se vzdálenosti mezi zásuvkou a přístrojem prodloužila.
3. Přístroj zapnete stiskem tlačítka **ON/OFF (5)**.
4. Pomocí stisku tlačítka **(4)** si můžete nastavit směr pohybu masážních hlavic. K dispozici jsou dva směry pohybu masážních hlavic.
5. Pomocí tlačítka **(3)** si můžete nastavit rychlost pohybu masážních hlavic. K dispozici jsou tři rychlosti pohybu. Nastavte si rychlost, která je vám příjemná.
6. Funkci vyhřívání můžete zapnout/vypnout pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ (2)**. Působení vyhřívání indikuje červená světelná signalizace **(1)**.
7. Pomocí madel na ruce si můžete přizpůsobit intenzitu masáže.
8. Přístroj je ideální používat vsedě.
9. Přístroj nepoužívejte déle než 30 minut denně.
10. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout stiskem tlačítka **ON/OFF (5)**.

JE DOBRÉ VĚDĚT

Masážní přístroj můžete používat vsedě nebo vleže. Pokud budete na přístroji ležet v horizontální poloze, budete na něj působit tlakem váhy svého těla a masáž bude maximálně intenzivní! Sílu masáže zmírníte tím, že si sednete do židle nebo křesla. Intenzitu masáže si díky tomu regulujete sami tlakem, kterým na masážní přístroj působíte. Pokud je intenzita masáže přesto silná, vložte mezi záda a polštářek dečku, čímž tlak masážních hlavic zmírníte.

MOŽNOSTI POUŽITÍ


Masážní přístroj můžete používat na následující partie těla:

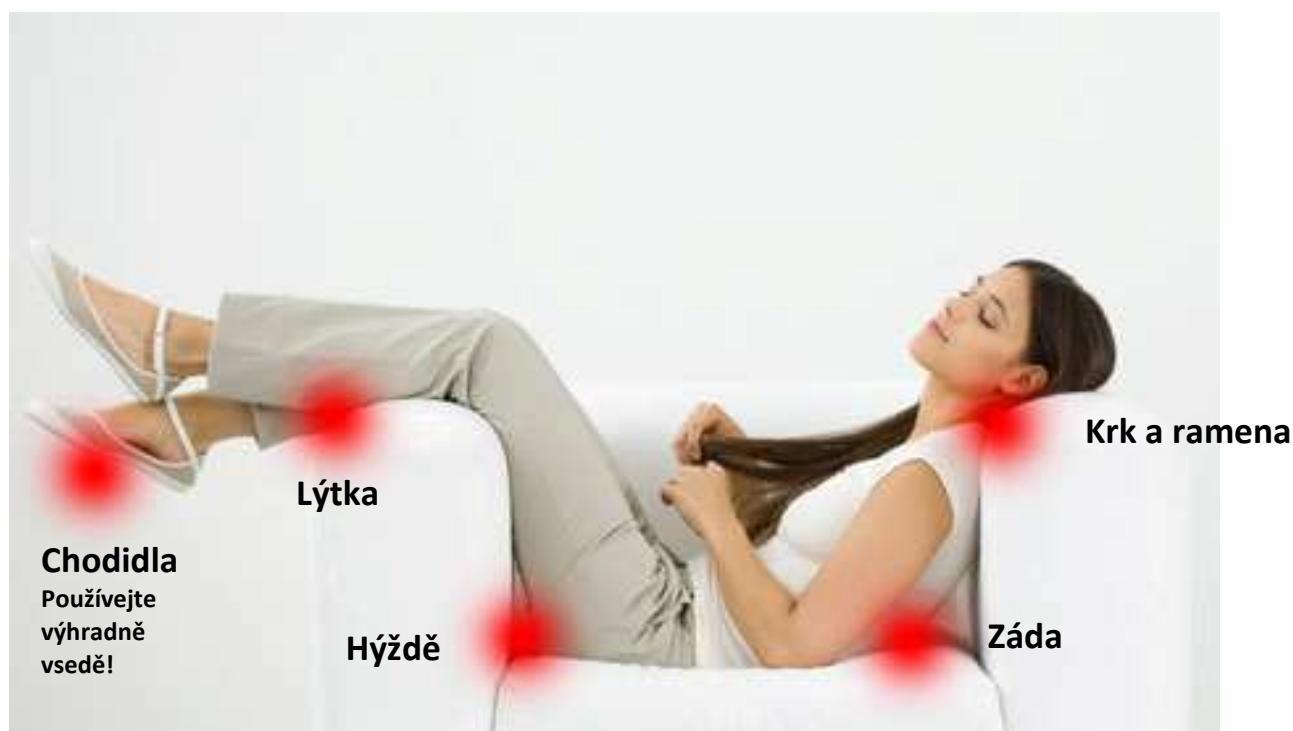

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Klíčovou vlastností masážního přístroje je univerzální použití. Určeno pro uživatele každého věku.

AKTIVNĚ
PRACUJÍCÍ

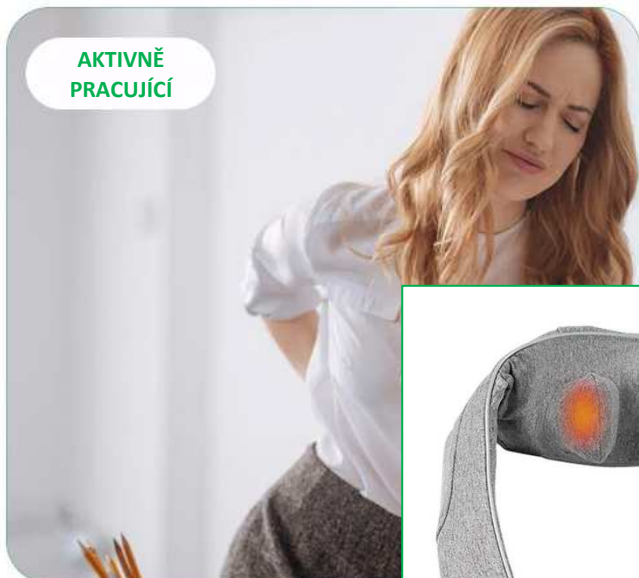

TANEČNICE



SENIOŘI



STUDENTI



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch. V případě potřeby můžete pomoci zipu návlek sundat a ručně vyprat. Nepoužívejte pračku. Postačí běžný prací prostředek a mírně vlažná voda.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj BeautyRelax shiatsu 5D Ultimate

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2915**

EAN: **8594166121874**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 9.2.2022