


KRČNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

SHIATSU *BR-085*




NÁVOD K POUŽITÍ

POPIS PŘÍSTROJE

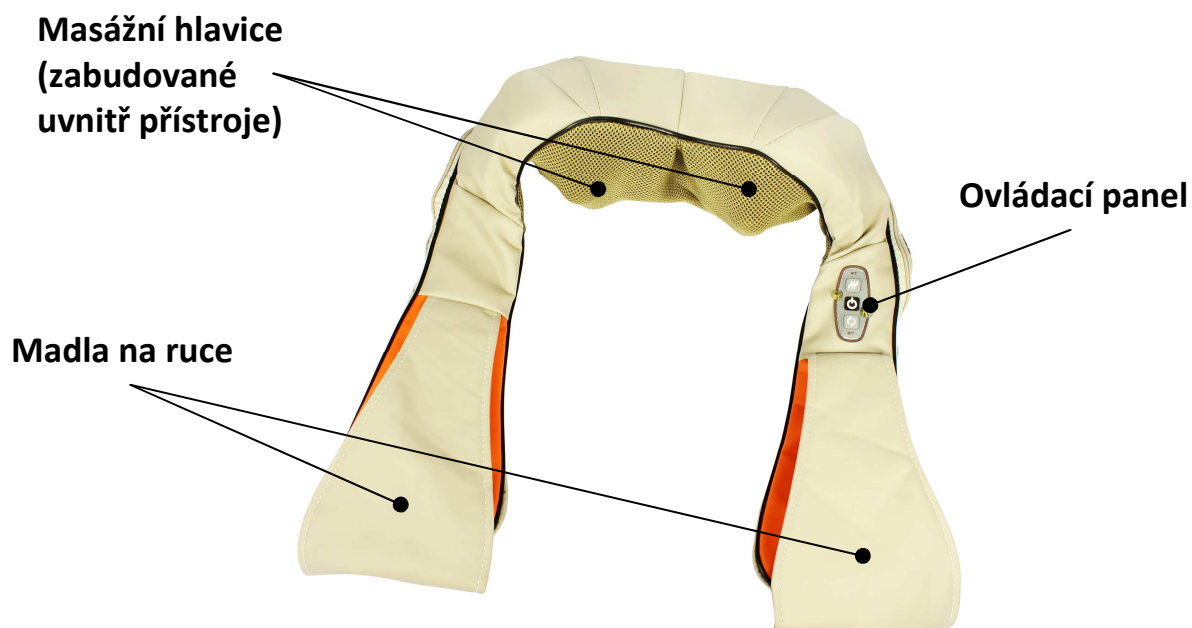

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

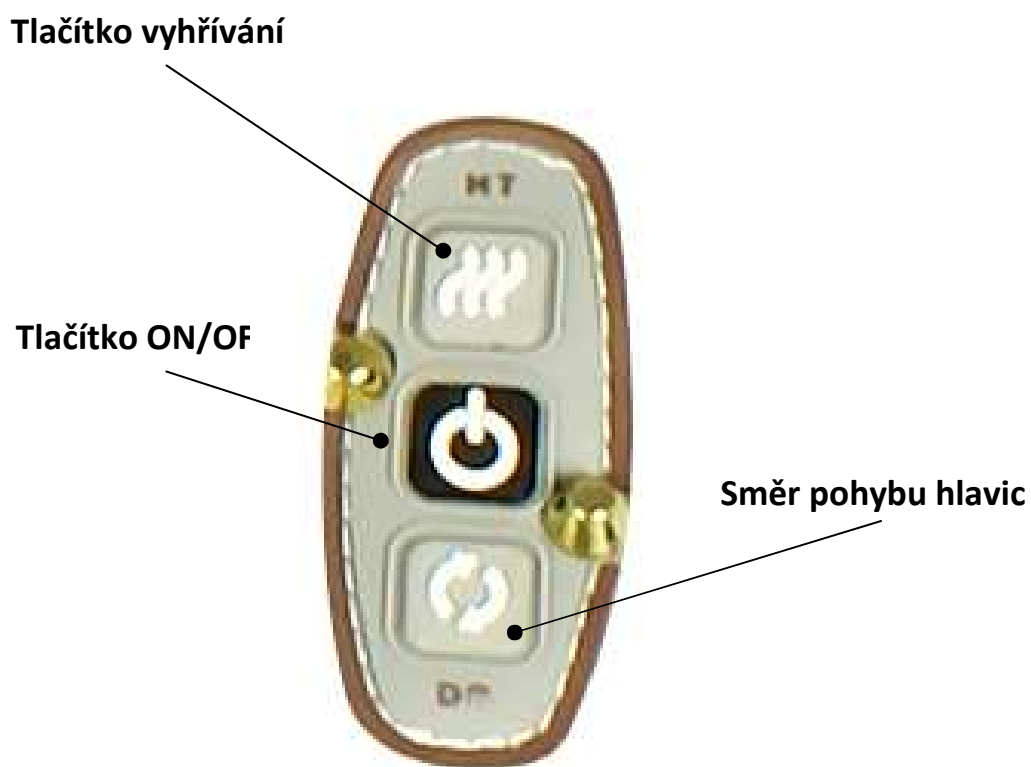

VLASTNOSTI

- Účinné zmírnění nepříjemného napětí a ztuhlosti.
- Skvělý nástroj pro sportovce na regeneraci svalů.
- Napomáhá odstranit příznaky únavy a vyčerpání.
- Univerzální použití na více částí těla: krk, ramena, záda, pas nebo stehna.
- Příjemná relaxace po náročném pracovním dni.
- Může vám dělat společnost i na cestách.

SPECIFIKACE

- 6 výkonných masážních hlavic poskytuje intenzivní hloubkovou masáž.
- Infračervené teplo proniká do hloubky svalové tkáně a zlepšuje krevní oběh.
- Madla na ruce umožňují přístroj uchopit a tlakem regulovat intenzitu masáže.
- Dotykový panel pro snadné ovládání funkcí pomocí 3 tlačítek.
- Tlačítko ON/OFF, vyhřívání, směr pohybu masážních hlavic (po směru nebo proti směru).
- Odnímatelný potah, který se snadno čistí.
- Lehký a kompaktní design.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Krční masážní přístroj poskytuje typ masáže nazývanou jako SHIATSU. Hlavním princip této prastaré japonské léčebné metody spočívá v masáži pomocí tlaku palců, prstů nebo dlaní za účelem odstranění svalového napětí. Uvnitř přístroje jsou zabudované masážní hlavice, které maximálně realisticky simulují pohyb rukou profesionálního maséra. Uživatel si může na ovládacím panelu nastavit směr pohybu masážních hlavic (ve směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček). Přístroj má funkci vyhřívání, kterou je možné dle potřeby aktivovat. Vyhřívání výrazným způsobem zvyšuje celkový účinek masáže. Teplo proniká hluboko pod pokožku. Prohřáté svaly tak potřebují kratší dobu masáže pro jejich celkové uvolnění.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Krční masážní přístroj můžete aplikovat například na krk, ramena, záda, pas nebo stehna. Použití je skutečně velice univerzální. Použití je doporučeno v maximální délce 30 minut. Potah je odnímatelný a snadno se čistí. Masážní přístroj můžete používat kdekoliv. Doma, v kanceláři nebo v automobilu během přestávky na dlouhé cestě. Madla na ruce umožňují přístroj uchopit a tlakem regulovat intenzitu masáže.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

1. Zapojte do přístroje adaptér podle místa použití.
(doma 220V nebo v autě 12V)
!!! v žádném případě nepoužívejte přístroj za jízdy !!!
2. Límec si nasadte na krk tak, aby byly masážní hlavice přímo v kontaktu oblastí, kterou chcete namasírovat.
3. Stiskem tlačítka ON/OFF zapnete funkci masáže.
4. Pomocí spodního tlačítka na ovládacím panelu změníte směr pohybu hlavic.
5. Funkci vyhřívání zapnete stiskem horního tlačítka na ovládacím panelu.
6. Intenzitu masáže si můžete sami ovlivňovat pomocí madel na koncích límce.
Čím více přitlačíte, tím bude masáž intenzivnější.
7. Masáž je doporučena v délce maximálně 10-15 minut na jedné partii.
8. Činnost masážního límce vypnete stiskem tlačítka ON/OFF.

OBLASTI POUŽITÍ



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- přístroj nepoužívejte během řízení automobilu; vždy před každým použitím zastavte na odpočívadle
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 10 až 15 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění krčního svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou údržbu
- před čištěním ovladače vyjměte baterie nebo odpojte od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- škody, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozornění a pokynů k použití zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



TECHNICKÉ PARAMETRY

Spotřeba: 24 W.

Napájení: adaptérem ze sítě 220 V nebo 12 V (do autozapalovače).

Rozměry: 40x31,5x16 cm.

Hmotnost: 2 kg.

AŽ VÝROBEK DOSLOUŽÍ...



Uvedený symbol na výrobku a v tomto návodu k použití znamená, že použitý výrobek po skončení jeho životnosti nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o. | Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 | Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.