

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj **BeautyRelax BR-1870**

SHIATSUMAX COMFORT



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
OBSAH BALENÍ	6
BLAHODÁRNÉ ÚČINKY SHIATSU MASÁŽE	7
PRAKTICKÁ FUNKCE VYHŘÍVÁNÍ	8
VIBRAČNÍ MASÁŽ	8
HLAVNÍ VÝHODY	9
BENEFITY PŘÍSTROJE	10
TECHNICKÉ PARAMETRY	11
POPIS PŘÍSTROJE	12
POPIS OVLADAČE	13
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	14
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	15
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	16
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	16
CERTIFIKACE	16
DOVOZCE	16
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	17

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřijímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Je striktně ZAKÁZÁNO používat masážní přístroj během jízdy v automobilu. V případě nehody se vystavujete riziku poranění páteře nebo jiné oblasti, která by byla masážním přístrojem masírována.

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Operace tělesné partie, pro kterou je přístroj určen
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Srdeční onemocnění, hypertenze
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax ShiatsuMax Comfort je luxusní masážní matrace, která poskytuje příjemné uvolnění celého těla. Využívá celkem tři oddělené masážní mechanismy se zaměřením na krční páteř, ramena, horní část zad, bedra, kříže a hýždě. Pohyblivé masážní hlavice pokryjí celou oblast zad. Masážní mechanismus věrně kopíruje pohyb rukou zkušeného maséra. Vyhřívání přispívá k uvolnění svalové tenze. BeautyRelax ShiatsuMax Comfort je skutečné masážní studio přímo u vás doma! Pohodlné dálkové ovládání.



OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj BeautyRelax BR-1870 SHIATSUMAX COMFORT
- Napájecí adaptér 220V
- Napájecí adaptér 12V
- Návod k obsluze

BLAHODÁRNÉ ÚČINKY SHIATSU MASÁŽE

BeautyRelax ShiatsuMax Comfort poskytuje Shiatsu masáž. Vaše tělo budou hýčkat rovnou tři masážní mechanismy. Hlavní princip této prastaré japonské léčebné metody spočívá v masáži pomocí tlaku palců, prstů nebo dlaní za účelem odstranění svalového napětí. Speciálně tvarované aplikační hlavice krouživým pohybem věrně napodobují pohyb lidských rukou. Můžete si nastavit směr pohybu masážních hlavice. Masážní mechanismus se pohybuje ve vertikálním směru od horní části zad dolů a nazpět. Masážní hlavice masírují záda v celé jejich délce.



PRAKTICKÁ FUNKCE VYHŘÍVÁNÍ

V masážních salonech je působení tepla samozřejmostí. K tomuto účelu se nejčastěji používají zahřáté lávové kameny. Masážní matrace BeautyRelax ShiatsuMax Comfort o vás bude také pečovat příjemným teplem. Vyhřívání se zapíná pomocí ovladače. Mechanický pohyb a teplo jsou pro masáž svalů zásadní. Působením tepla dochází k prohřátí jednotlivých svalových vláken. Přítomnost tepla výrazně přispívá k efektivnějšímu uvolnění svalové tenze.

VIBRAČNÍ MASÁŽ

V sedáku matrace BeautyRelax ShiatsuMax Comfort jsou zabudované výkonné masážní motorky. Vibrační masáž uvolňuje hýždě svaly. Oceníte při sedavém zaměstnání. Pomocí ovladače si můžete nastavit 3 různé masážní vibrační módy. O vaše hýždě bude pečovat nejen vibrační masáž, ale také vyhřívání.



HLAVNÍ VÝHODY

- Masážní mechanismus věrně kopíruje pohyb lidských rukou
- Pár masážních hlavice pro oblast krční páteře
- Dva páry masážních hlavice v oblasti horní části zad, oblast beder a kříže
- Hlavní masážní mechanismus se v oblasti zad pohybuje ve vertikálním směru
- Možnost nastavení masáže pro vybrané části zad
- Možnost nastavení směru pohybu masážních hlavice
- Funkce vyhřívání přispívá k rychlejšímu uvolnění zatuhlých svalů
- Sílu masáže si můžete sami regulovat použitím matrace vleže nebo vsedě
- Komfortní dálkový ovladač
- Vibrační uvolňující masáž pro oblasti hýždí
- Časovač: ano



BENEFITY PŘÍSTROJE

- Uvolňuje zatuhlé svaly
- Odbourává stres
- Napomáhá odstranit příznaky únavy
- Zlepšuje krevní oběh
- Namasíruje krční páteř, ramena, horní část zad, oblast beder, kříže a hýždí



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ masáže: Shiatsu, vibrace
- Vyhřívání: ano
- Materiál: kvalitní prošívaná syntetická kůže
- Napájení: adaptérem 220V nebo 12V (součástí balení)
- Výkon: 48W
- Rozměry: 70x40x40cm
- Hmotnost: 2,9kg




POPIS PŘÍSTROJE

1. Ovladač
2. Masážní mechanismus pro oblast krku
3. Masážní mechanismus pro oblast zad
4. Masážní zóna pro oblast hýždí



POPIS OVLADAČE

1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
3. Tlačítko **AUTO**
4. Tlačítko **POZICE**
5. Tlačítko **VIBRACE**
6. Tlačítko **KRK**

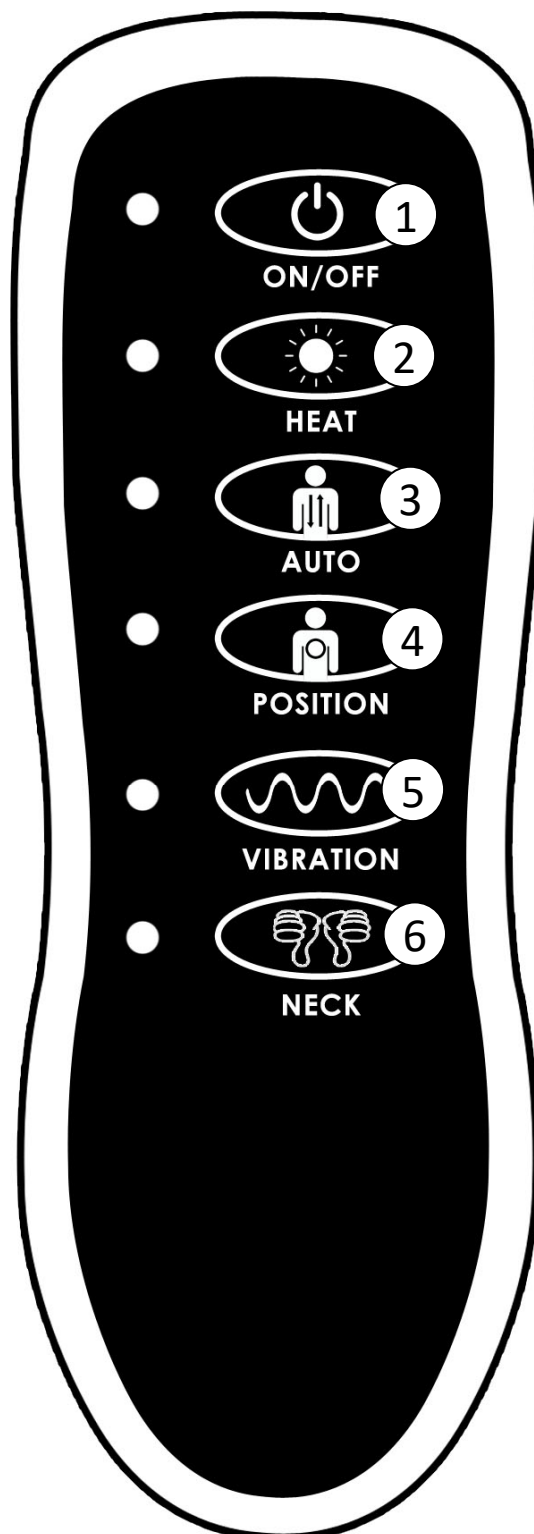

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Připojte přístroj k napájecímu adaptéru. Vždy dbejte na to, aby v průběhu použití přístroje nebyl kabel adaptéru příliš napnutý. V průběhu použití přístroje by mohlo dojít k vytržení kabelu. Pokud to situace vyžaduje, použijte prodlužovací kabel (není součástí balení).
2. Pokud používáte přístroj v automobilu, pro napájení využijte kabel pro auto zásuvku 12V.
Přístroj nikdy nepoužívejte v průběhu jízdy.
3. Všechny funkce přístroje si můžete snadno nastavit pomocí ovladače. U každého tlačítka je světelná signalizace, která doprovází aktivaci dané funkce tlačítka.
4. Pro zapnutí přístroje použijte tlačítko **ON/OFF**. Přístroj zahájí masáž v programu **AUTO**. V automatickém programu se řídí průběh masáže automaticky a není možné provádět ruční změny.
5. Pomocí tlačítka **POSITION** si můžete ručně nastavit, na kterém místě v oblasti zad má působit masážní mechanismus. Pokud svítí indikace u tlačítka **POSITION** zeleně, masážní mechanismus pracuje v horní části zad. Pokud svítí indikace u tlačítka **POSITION** červeně, masážní mechanismus pracuje v dolní části zad. Pokud svítí indikace u tlačítka **POSITION** oranžově, masážní mechanismus pracuje v celé délce zad.
6. Pomocí tlačítka **HEAT** si můžete zapnout nebo vypnout funkci vyhřívání pro oblast krku a zad.
7. Pomocí tlačítka **VIBRATION** si můžete zapnout nebo vypnout funkci vibrací v oblasti hýždí.
8. Po uplynutí 15 minut se činnost přístroje zastaví.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.
10. Po vypnutí se ještě chvíli pohybuje masážní mechanismus. K úplnému vypnutí přístroje dojde v okamžiku, kdy se dostanou hlavice pro oblast zad do základní polohy.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. V průběhu používání přístroje můžete průběžně měnit různé nastavení přístroje. Aktivujte si ty funkce, které jsou vám pro relaxaci těla příjemné.
2. Doporučená délka masáže je maximálně 30 minut ve frekvenci 2x až 3x týdně.
3. Přístroj můžete používat vsedě nebo vleže. Intenzitu masáže si můžete sami upravit pomocí sklonu, který zvolíte. Pokud používáte přístroj v horizontální poloze, je třeba si uvědomit, že na přístroj působíte vlastní vahou. Tlak na přístroj je větší a masáž dosahuje největší intenzity.
4. Přístroj nepoužívejte v automobilu za jízdy. Vždy zastavte na bezpečné místo a poté relaxujte. Pokud byste používali přístroj v průběhu jízdy, v případě nehody by masážní mechanismus přístroje fatálně poranil vaši páteř.
5. Přístroj poskytuje velmi intenzivní mechanickou masáž. Masážní hlavice vyvíjí tlak na jednotlivé části krční páteře a zad. Pokud jste po operaci páteře, použití přístroje konzultujte se svým lékařem. Stejně tak je třeba věnovat zvýšenou pozornost v případě vážného poranění zad (např. vyhrzlá ploténka). V tomto případě použití přístroje nedoporučujeme.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj SHIATSUMAX COMFORT

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1870**

EAN: **8594166118614**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

Dle registračního čísla certifikátu: **UNIA2018013128SR-01**

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 1.2.2023