

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní pás  
BeautyRelax BR-1880

**BeltMax**





## OBSAH:

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ                   | 4  |
| ÚČEL POUŽITÍ                              | 5  |
| HLAVNÍ VÝHODY                             | 5  |
| 3 AUTOMATICKÉ MASÁŽNÍ PROGRAMY            | 5  |
| OBSAH BALENÍ                              | 5  |
| POPIS OVLÁDACÍHO PANELU                   | 6  |
| POUŽITÍ PŘÍSTROJE                         | 7  |
| NABÍJENÍ BATERIE                          | 7  |
| MOŽNOSTI POUŽITÍ                          | 8  |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 11 |
| CERTIFIKACE                               | 11 |
| DOVOZCE                                   | 11 |

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozornění a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

## ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax BeltMax je masážní pás, který využívá moderní technologie pro příjemnou relaxaci. Unikátní kombinace infračerveného tepla a vysokofrekvenční vibrační masáže. Účinné řešení pro uvolnění oblasti beder a kříže. Zpevnění oblasti pasu zejména v oblasti břicha. Přizpůsobí se každému uživateli zapínáním na suchý zip. Bezdrátové použití díky vestavěné nabíjecí baterii. 3 úrovně rychlosti vibrační masáže. 3 úrovně infračerveného tepla.

## HLAVNÍ VÝHODY

- Technologie vibrační masáže a infračerveného tepla
- Zmírňuje svalové napětí
- Napomáhá zpevnit oblast pasu
- 3 úrovně rychlosti vibrační masáže
- 3 úrovně tepla (40°C, 50°C, 60°C)
- Špičková technologie pro udržení konstantní teploty
- Přizpůsobí se každému uživateli zapínáním na suchý zip
- Bezdrátové použití díky vestavěné nabíjecí baterii Li-ion
- Maximální bezpečnost používání
- Působení tepla je rovnoměrně rozložené na oblast břicha a zad
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka


## 3 AUTOMATICKÉ MASÁŽNÍ PROGRAMY

- 1. mód - časovač 20 minut, 40°C
- 2. mód - časovač 40 minut, 50°C
- 3. mód - časovač 60 minut, 60°C

## OBSAH BALENÍ

- 1x Masážní pás BeautyRelax BeltMax
- 1x Nabíjecí adaptér 220V
- 1x Návod k obsluze

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

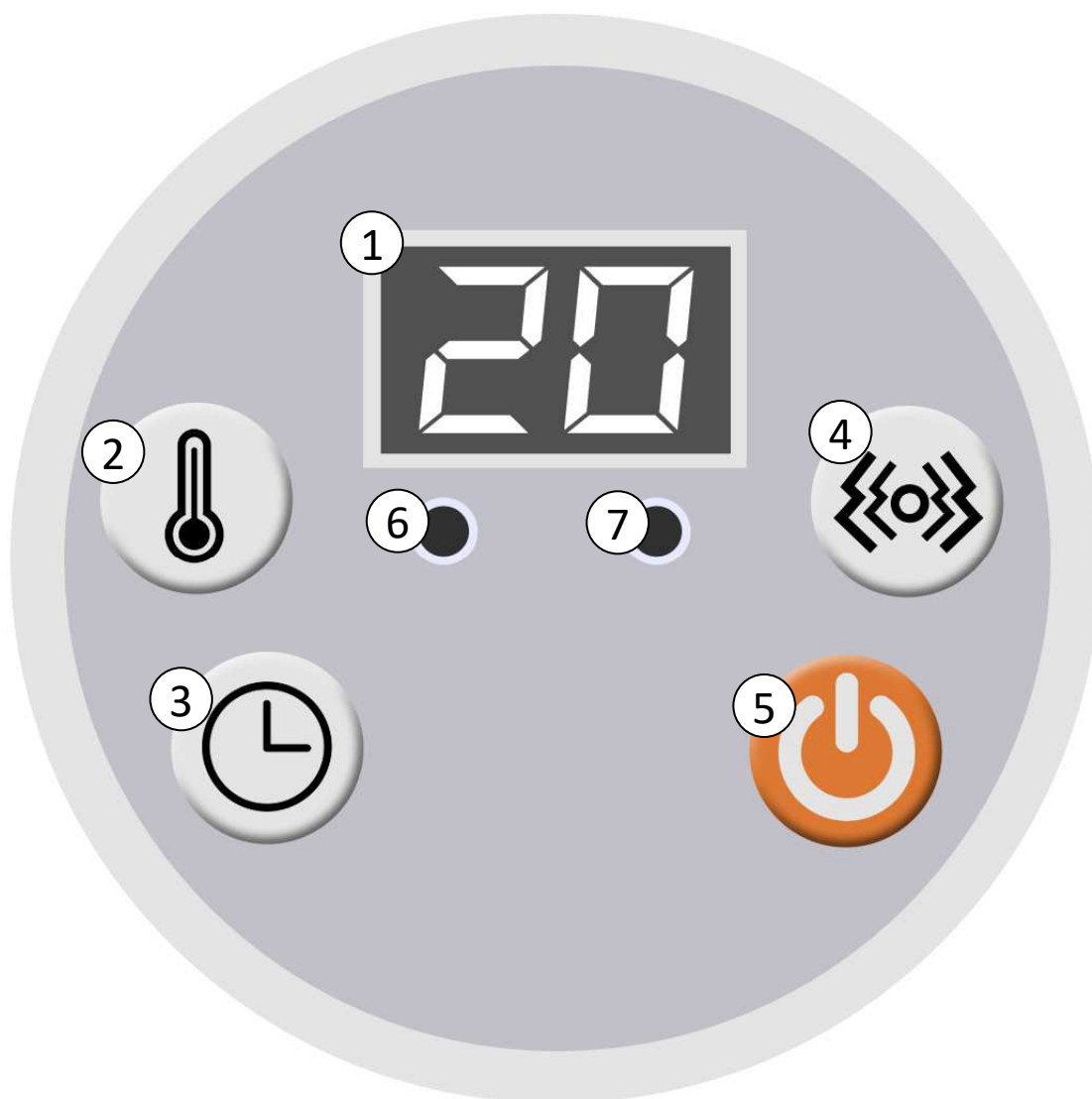

1. Displej
2. Tlačítko **TEPLOTA**
3. Tlačítko **ČAS**
4. Tlačítko **VIBRACE**
5. Tlačítko **ON/OFF**
6. Kontrolka vyhřívání
7. Kontrolka vibrací

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Stiskněte tlačítko **ON/OFF**. Přístroj se spustí do pohotovostního režimu. Na displeji svítí nápis „OF“.
2. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** zahájíte činnost přístroje. Výchozí časovač je nastaven na hodnotě 20 minut.
3. Pomocí tlačítka **ČAS** si můžete nastavit časovač. K dispozici jsou hodnoty 20 minut, 40 minut, 60 minut.
4. Pomocí tlačítka **VIBRACE** si můžete nastavit masážní program. K dispozici jsou 3 programy: **P0** (vypnuto) – **P1** – **P2** – **P3** – **P0** (vypnuto). Zvolte si takový program, který vám bude příjemný.
5. Pomocí tlačítka **TEPLOTA** si můžete nastavit působení tepla. K dispozici jsou 3 úrovně: **H0** (vypnuto) – **H1** (40°C) – **H2** (50°C) – **H3** (60°C) – **H0** (vypnuto).
6. Můžete si tak nastavit, aby bylo aktivní pouze vyhřívání nebo pouze vibrace nebo vyhřívání a vibrace dohromady.
7. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

## NABÍJENÍ BATERIE

1. K nabíjení baterie používejte výhradně adaptér, který je součástí balení.
2. Adaptér připojte do elektrické sítě 220V.
3. Kabel adaptéru připojte k masážnímu pásu.
4. Průběh nabíjení baterie je doprovázen světelnou signalizací.
5. Jakmile je nabíjení baterie dokončeno, rozsvítí se zelená světelná signalizace.
6. Délka nabíjení se odvíjí od stavu baterie.

## MOŽNOSTI POUŽITÍ









## **LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## **CERTIFIKACE**



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## **DOVOZCE**

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737196160

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

## **Masážní pás BeltMax**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1880, BR-1890**

EAN: **8594166118621, 8594166118638**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

**je ve shodě** s následujícími evropskými normami:

**EN 55014-1:2017**

**EN 55014-2:2015**

**EN 61000-3-2:2014**

**EN 61000-3-3:2013**

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno Dne: 1.4.2020

Martin Hrbek, jednatel