

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní pás
BeautyRelax BR-1890

BeltMax



OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
3 AUTOMATICKÉ MASÁŽNÍ PROGRAMY	5
OBSAH BALENÍ	5
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	6
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	7
NABÍJENÍ BATERIE	7
MOŽNOSTI POUŽITÍ	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	11
CERTIFIKACE	11
DOVOZCE	11

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozornění a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax BeltMax je masážní pás, který využívá moderní technologie pro příjemnou relaxaci. Unikátní kombinace infračerveného tepla a vysokofrekvenční vibrační masáže. Účinné řešení pro uvolnění oblasti beder a kříže. Zpevnění oblasti pasu zejména v oblasti břicha. Přizpůsobí se každému uživateli zapínáním na suchý zip. Bezdrátové použití díky vestavěné nabíjecí baterii. 3 úrovně rychlosti vibrační masáže. 3 úrovně infračerveného tepla.

HLAVNÍ VÝHODY

- Technologie vibrační masáže a infračerveného tepla
- Zmírňuje svalové napětí
- Napomáhá zpevnit oblast pasu
- 3 úrovně rychlosti vibrační masáže
- 3 úrovně tepla (40°C, 50°C, 60°C)
- Špičková technologie pro udržení konstantní teploty
- Přizpůsobí se každému uživateli zapínáním na suchý zip
- Bezdrátové použití díky vestavěné nabíjecí baterii Li-ion
- Maximální bezpečnost používání
- Působení tepla je rovnoměrně rozložené na oblast břicha a zad
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka


3 AUTOMATICKÉ MASÁŽNÍ PROGRAMY

- 1. mód - časovač 20 minut, 40°C
- 2. mód - časovač 40 minut, 50°C
- 3. mód - časovač 60 minut, 60°C

OBSAH BALENÍ

- 1x Masážní pás BeautyRelax BeltMax
- 1x Nabíjecí adaptér 220V
- 1x Návod k obsluze

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

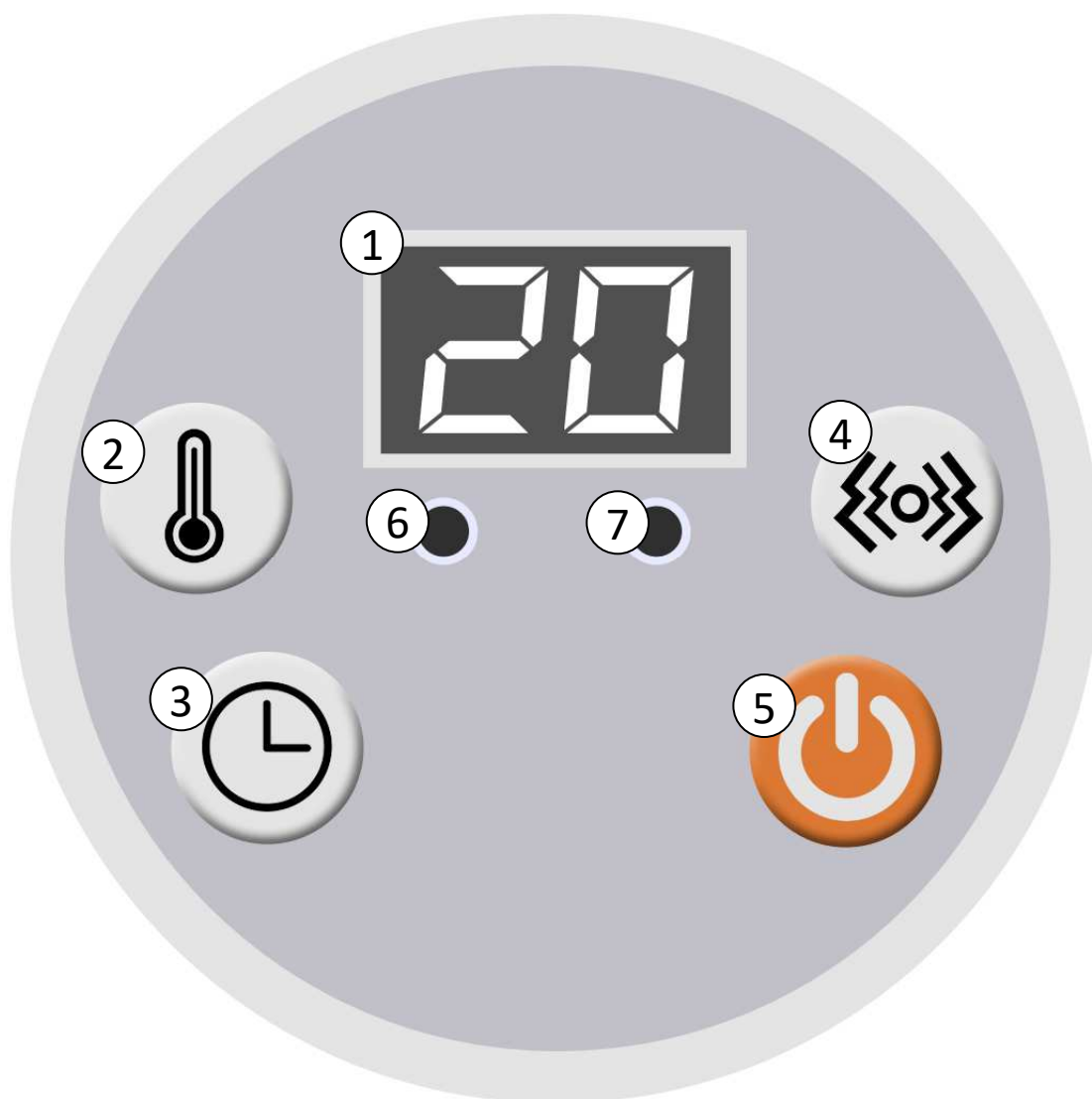

1. Displej
2. Tlačítko **TEPLOTA**
3. Tlačítko **ČAS**
4. Tlačítko **VIBRACE**
5. Tlačítko **ON/OFF**
6. Kontrolka vyhřívání
7. Kontrolka vibrací

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Stiskněte tlačítko **ON/OFF**. Přístroj se spustí do pohotovostního režimu. Na displeji svítí nápis „OF“.
2. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** zahájíte činnost přístroje. Výchozí časovač je nastaven na hodnotě 20 minut.
3. Pomocí tlačítka **ČAS** si můžete nastavit časovač. K dispozici jsou hodnoty 20 minut, 40 minut, 60 minut.
4. Pomocí tlačítka **VIBRACE** si můžete nastavit masážní program. K dispozici jsou 3 programy: **P0** (vypnuto) – **P1** – **P2** – **P3** – **P0** (vypnuto). Zvolte si takový program, který vám bude příjemný.
5. Pomocí tlačítka **TEPLOTA** si můžete nastavit působení tepla. K dispozici jsou 3 úrovně: **H0** (vypnuto) – **H1** (40°C) – **H2** (50°C) – **H3** (60°C) – **H0** (vypnuto).
6. Můžete si tak nastavit, aby bylo aktivní pouze vyhřívání nebo pouze vibrace nebo vyhřívání a vibrace dohromady.
7. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

NABÍJENÍ BATERIE

1. K nabíjení baterie používejte výhradně adaptér, který je součástí balení.
2. Adaptér připojte do elektrické sítě 220V.
3. Kabel adaptéru připojte k masážnímu pásu.
4. Průběh nabíjení baterie je doprovázen světelnou signalizací.
5. Jakmile je nabíjení baterie dokončeno, rozsvítí se zelená světelná signalizace.
6. Délka nabíjení se odvíjí od stavu baterie.

MOŽNOSTI POUŽITÍ







LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní pás BeltMax

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1880, BR-1890**

EAN: **8594166118621, 8594166118638**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno Dne: 1.4.2020

Martin Hrbek, jednatel