

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní polštářek Shiatsu **BeautyRelax BR-060**



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

Masážní polštářek poskytuje blahodárnou Shiatsu masáž pro celé vaše tělo. Ideální pro krční páteř, ramena, bedra, hýždě lýtka nebo chodidla. Neutrácejte za drahé masážní salony a nechte se hýčkat přímo u vás doma! Uvolňuje zatuhlé svaly. Odbourává stres a napětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřijímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Masážní polštářek poskytuje příjemnou uvolňující SHIATSU masáž. Principem této prastaré japonské léčebné metody spočívá v masáži pomocí tlaku palců, prstů nebo dlaní za účelem odstranění svalového napětí. Uvnitř polštářku jsou zabudované masážní hlavice, které maximálně realisticky simulují pohyb rukou profesionálního maséra. Uživatel si může nastavit směr pohybu masážních hlavic (ve směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček).

VLASTNOSTI A SPECIFIKACE

- Skutečná Shiatsu masáž.
- Dva páry velkých masážních hlavic.
- Imitují pohyb rukou maséra.
- Krouživé pohyby SHIATSU masáže.

MNOHO MOŽNOSTÍ APLIKACE

- Polštářek namasíruje celé tělo.
- Krční páteř, ramena, lýtka, chodidla, ...
- Uživatel si sám reguluje intenzitu masáže.

PŘÍZNIVÉ ÚČINKY PRO TĚLO

- Odstraňuje příznaky únavy.
- Zlepšuje krevní oběh.
- Odbourává svalové napětí.

VARIABILITA POUŽÍVÁNÍ

- Malé rozměry, nízká hmotnost.
- Součástí balení autoadaptér.
- Ideální do kanceláře, domu a na cesty.

POUŽITÍ

- Polštářek je ideální na masáž krční páteře, ramen, beder, hýždí, stehů, lýtek a chodidel.
- Použití je velice univerzální.
- Díky svému tvaru dokáže namasírovat libovolnou část těla.
- Masážní polštářek budete používat doma, v kanceláři nebo v automobilu během přestávky na dlouhých cestách.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Materiál: syntetická koženka.
- Typ masáže: Shiatsu (hnětení).
- Masážní hlavice: dva páry.
- Rozměry: 41x29x11cm.
- Hmotnost: 2,7kg.
- Příkon: 18W.
- Napájení: adaptérem 220V nebo 12V (součástí balení).

POPIS PŘÍSTROJE

1. Tlačítko ON/OFF
2. Masážní hlavice
3. Tělo přístroje





vysoce kvalitní koženka
s dlouhou životností



precizní kvalita šití



vzdušná a pevná tkanina



ovládání pomocí
jednoho tlačítka

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Masážní polštářek připojte k některému ze dvou adaptérů, které jsou součástí balení (adaptér pro napájení ze sítě 220V nebo autoadaptér 12V).
2. Masážní polštářek se snadno ovládá pomocí tlačítka ON/OFF.
3. Stiskem tlačítka ON/OFF polštářek zapnete ... masážní hlavice se pohybují.
4. Vyhřívání je zapnuté ... masážní hlavice jsou rozsvícené.
5. Dalším stiskem tlačítka ON/OFF se vypne funkce vyhřívání.
6. Po chvíli se směr rotace masážních hlavic mění automaticky.
7. Dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF masážní polštářek vypnete.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Je striktně **ZAKÁZÁNO** používat masážní polštářek během jízdy v automobilu. V případě nehody se vystavujete riziku poranění páteře nebo jiné oblasti, která by byla masážním polštářkem masírována.

JE DOBRÉ VĚDĚT

Masážní polštářek můžete používat vsedě nebo vleže. Pokud budete na polštářku ležet v horizontální poloze, budete na něj působit tlakem váhy svého těla a masáž bude maximálně intenzivní! Sílu masáže zmírníte tím, že si sednete do židle nebo křesla. Intenzitu masáže si díky tomu regulujete sami tlakem, kterým na masážní polštářek působíte. Pokud je intenzita masáže přesto silná, vložte mezi záda a polštářek dečku, čímž tlak masážních hlavic zmírníte.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Masážní polštářek můžete používat na následující partie těla:





stálá teplota




infráčervené
vyhřívání



hnětení



obousměrný
pohyb

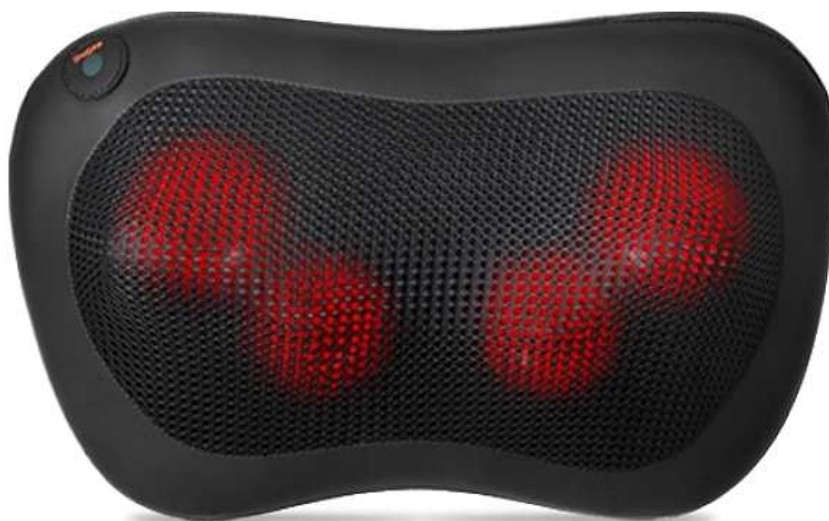

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 |

DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz
Tel: 737196160



masíruje na obou stranách krku



obousměrný provoz uvolňuje napětí



dvě různé velikosti masážních hlavíc

