

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní polštářek BeautyRelax BR-2951

SHIATSUMAX DELUXE



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
HLAVNÍ VÝHODY	7
POPIS PŘÍSTROJE	10
POPIS TLAČÍTEK OVLADAČE	11
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	14
JE DOBRÉ VĚDĚT	15
MOŽNOSTI POUŽITÍ	15
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	18
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	18
CERTIFIKACE	18
EU DISTRIBUTOR	18
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	19

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Je striktně ZAKÁZÁNO používat masážní přístroj během jízdy v automobilu. V případě nehody se vystavujete riziku poranění páteře nebo jiné oblasti, která by byla masážním přístrojem masírována.

OBSAH BALENÍ

- Masážní polštářek BeautyRelax BR-2951 SHIATSUMAX DELUXE
- Nabíjecí adaptér 220V
- Návod k obsluze

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Operace tělesné partie, pro kterou je přístroj určen
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



3 RYCHLOSTI MASÁŽE



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax ShiatsuMax Deluxe je masážní přístroj nové generace, který vám poskytne účinnou rehabilitaci pro celé vaše tělo. Disponuje unikátní funkcí vzduchového nastavení. Pomocí ruční pumpičky si můžete zvětšit nebo zmenšit profil přístroje. Snadno si tak můžete doupravit tloušťku polštářku podle masírované partie těla. Pokročilý pohyblivý masážní mechanismus. Jako by vás masírovalo 20 prstů současně. BeautyRelax ShiatsuMax Deluxe o vás bude pečovat kombinací hned několika technologií: hnětací masáž (shiatsu), vibrační masáž, magnetoterapie a působení tepla. Všechny funkce můžete snadno nastavit pomocí dálkového ovladače.



HLAVNÍ VÝHODY

- Skutečná Shiatsu masáž.
- Dvě masážní hlavice složené z 20 menších hlavic, které nahrazují skutečné prsty maséra.
- Dva směry pohybu masážních hlavic.
- Imitují pohyb rukou maséra.
- Krouživé pohyby SHIATSU masáže.
- Vzduchové nastavení profilu přístroje – pomocí ruční pumpičky si můžete zvětšit nebo zmenšit profil přístroje, aby se při použití maximálně přizpůsobil vašemu tělu.
- Vibrační masáž.
- Integrované magnety pro stálou magnetoterapii.
- 3 úrovně rychlosti masáže.
- Vyhřívání.
- Polštářek namasíruje celé tělo.
- Krční páteř, ramena, lýtka, chodidla, ...
- Uživatel si sám reguluje intenzitu masáže.
- Odstraňuje příznaky únavy.
- Zlepšuje krevní oběh.
- Odbourává svalové napětí.
- Prohřívá unavené svaly.
- Variabilita používání.
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost.
- Polštářek je ideální na masáž krční páteře, ramen, beder, hýždí, stehen, lýtek a chodidel.
- Použití je velice univerzální.
- Díky svému tvaru dokáže namasírovat libovolnou část těla.




20 MASÁŽNÍCH HLAVIC

10 HLAVIC NA KAŽDÉ STRANĚ
DVA SMĚRY POHYBU MASÁŽE
PŘÍMÉ ZACÍLENÍ NA KRK, RAMENA A ZÁDA



JAKO OPRAVDOVÁ MASÁŽ POMOCÍ RUKOU

OSOBNÍ PROFESIONÁLNÍ MASÉR

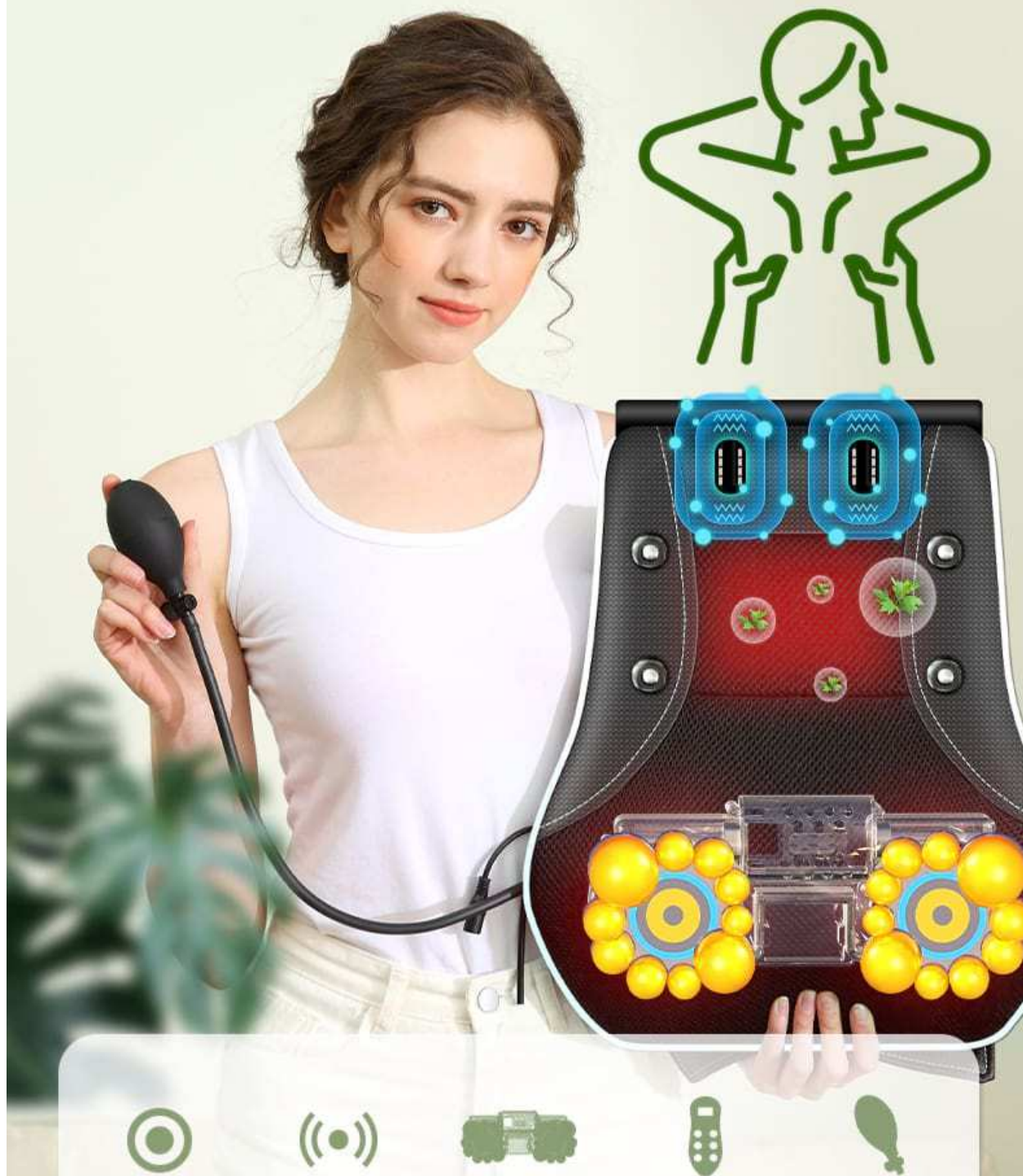

TERAPIE
MAGNETY

VIBRACE


20D MASÁŽNÍ
MECHANIZMUS

DÁLKOVÝ
OVLADAČ

VZDUCHOVÁ
PUMPA

POPIS PŘÍSTROJE

1. Dálkový ovladač
2. Vzduchový vak
3. Masážní hlavice
4. Masážní hlavice
5. Připojení napájecího kabelu
6. Oblast vyhřívání + vibrace
7. Magnetoterapie
8. Potah

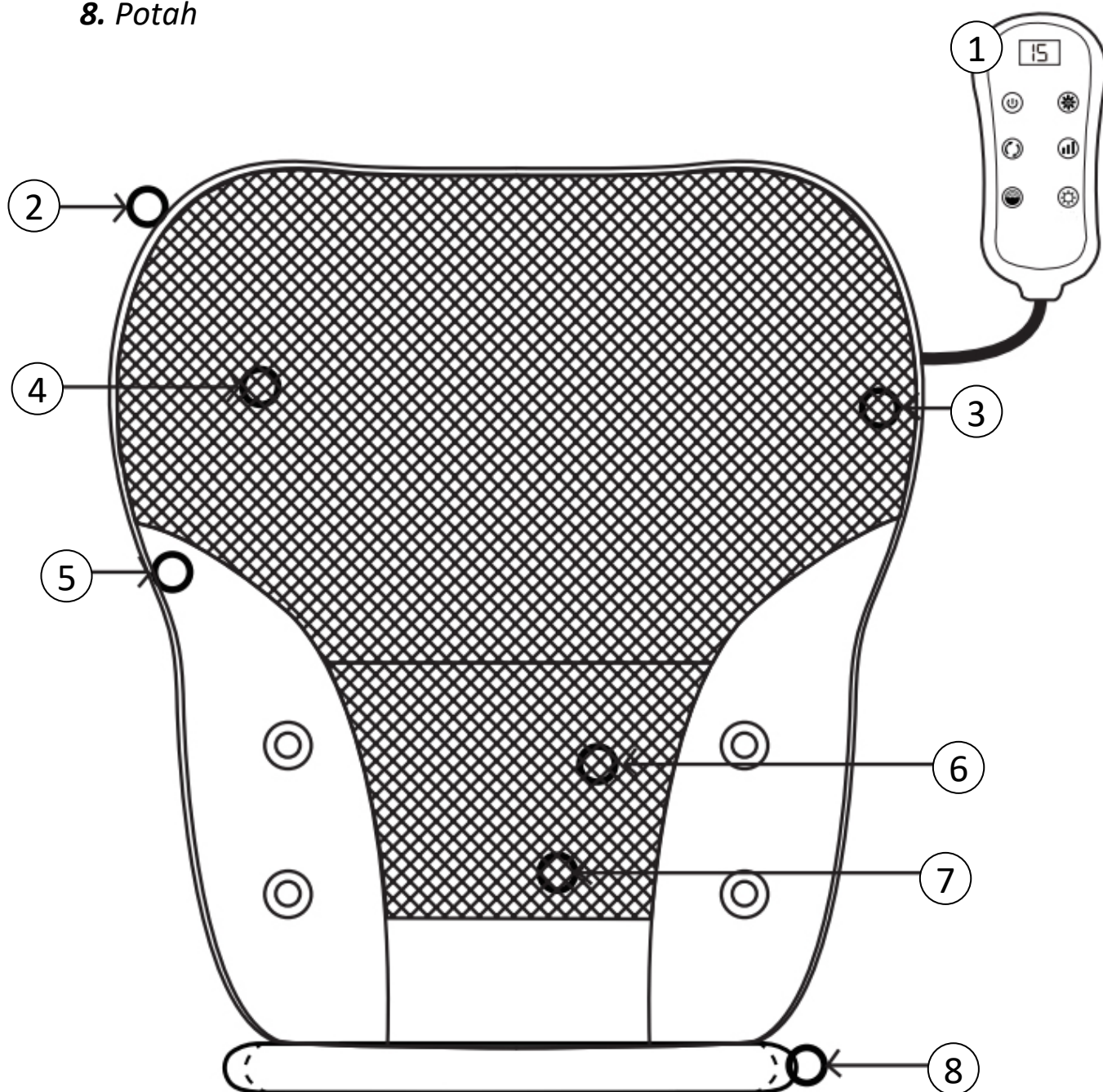

POPIS TLAČÍTEK OVLADAČE



Tlačítko **ON/OFF**



Tlačítko **ZMĚNA SMĚRU** pohybu hlavic



Tlačítko **ZMĚNA RYCHLOSTI** masáže



Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**



Tlačítko **VIBRACE**



Tlačítko **MASÁŽNÍ PROGRAM**



DÁLKOVÝ OVLADAČ

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
VŠECH FUNKCÍ PŘÍSTROJE



POUŽITÍ PŘÍSTROJE


- 1.** Přístroj připojte k napájecímu adaptéru, který je součástí balení.
- 2.** Vždy se snažte, aby nebyl v průběhu použití kabel příliš napnutý. Pokud to situace vyžaduje, použijte prodlužovací šňůru (není součástí balení), aby se vzdálenosti mezi zásuvkou a přístrojem prodloužila.
- 3.** Přístroj zapnete stiskem tlačítka **ON/OFF (1)**.
- 4.** Pomocí stisku tlačítka **(2)** si můžete nastavit směr pohybu masážních hlavic. K dispozici jsou dva směry pohybu masážních hlavic.
- 5.** Pomocí tlačítka **(3)** si můžete nastavit rychlost pohybu masážních hlavic. K dispozici jsou tři rychlosti pohybu. Nastavte si rychlost, která je vám příjemná.
- 6.** Funkci vyhřívání můžete zapnout/vypnout pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ (4)**.
- 7.** Pomocí tlačítka **VIBRACE (5)** můžete zapnout/vypnout funkci vyhřívání.
- 8.** Pomocí tlačítka **(6)** si můžete nastavit program masáže.
- 9.** Pomocí ruční pumpičky si můžete upravit profil masážního přístroje tak, aby vám nejvíce vyhovoval při použití. Stisknutím tlačítka na pumpičce vzduch vypustíte.
- 10.** Přístroj nepoužívejte déle než 30 minut denně.
- 11.** Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout stiskem tlačítka **ON/OFF (1)**.

JE DOBRÉ VĚDĚT

Masážní přístroj můžete používat vsedě nebo vleže. Pokud budete na přístroji ležet v horizontální poloze, budete na něj působit tlakem váhy svého těla a masáž bude maximálně intenzivní! Sílu masáže zmírníte tím, že si sednete do židle nebo křesla. Intenzitu masáže si díky tomu regulujete sami tlakem, kterým na masážní přístroj působíte. Pokud je intenzita masáže přesto silná, vložte mezi záda a polštářek dečku, čímž tlak masážních hlavic zmírníte.


MOŽNOSTI POUŽITÍ

Masážní přístroj můžete používat na následující partie těla:

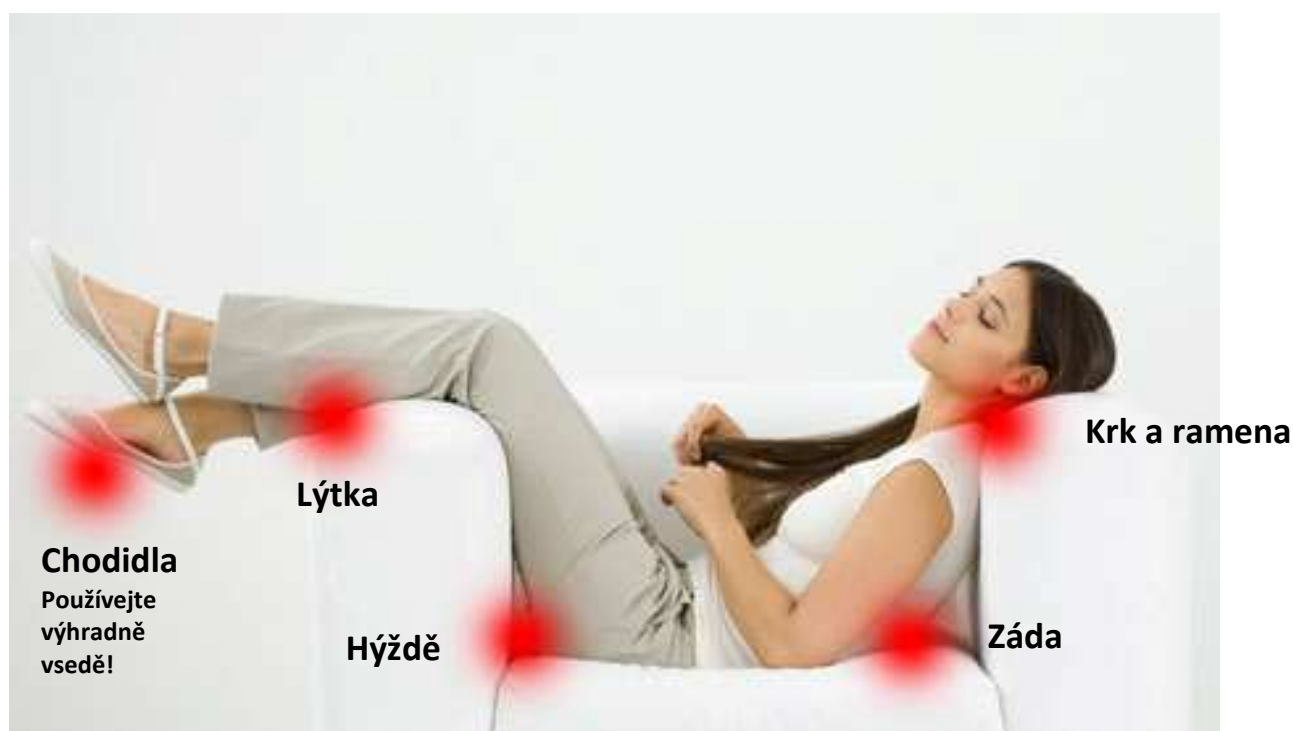

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Klíčovou vlastností masážního přístroje je univerzální použití. Určeno pro uživatele každého věku.

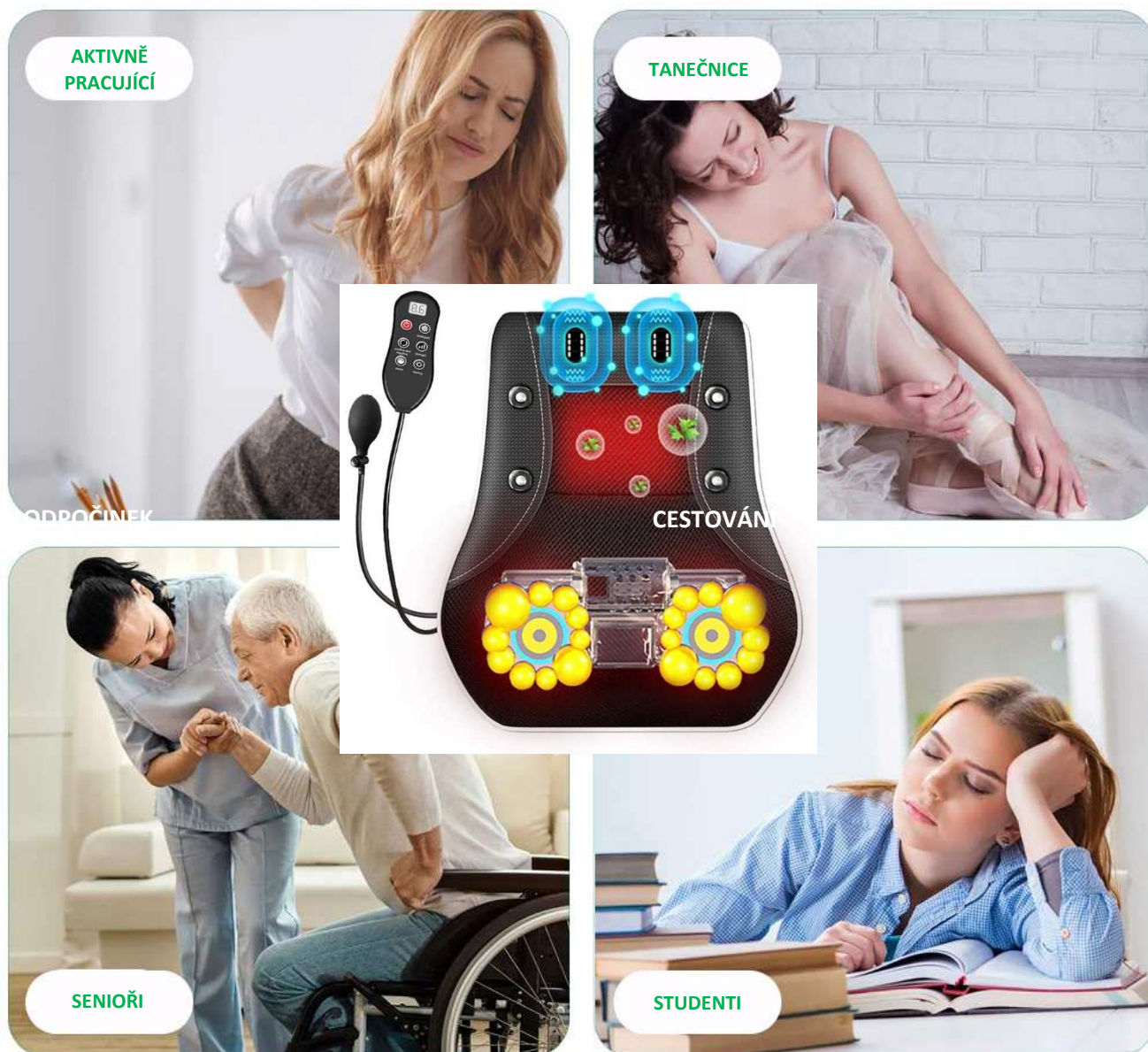



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch. V případě potřeby můžete pomoci zipu návlek sundat a ručně vyprat. Nepoužívejte pračku. Postačí běžný prací prostředek a mírně vlažná voda.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE

- Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní polštářek BeautyRelax

SHIATSUMAX DELUXE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2951**

EAN: **8594166122307**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 9.2.2022