

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní polštářek **BeautyRelax BR-2952**

SHIATSUMAX UNIVERSAL



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	5
OBSAH BALENÍ	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
POPIS PŘÍSTROJE	19
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	20
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	21
JE DOBRÉ VĚDĚT	22
MOŽNOSTI POUŽITÍ	22
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	23
CERTIFIKACE	23
DOVOZCE	23
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	24

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Pokud jste po vážné operaci bederní páteře, konzultujte možnost použití se svým lékařem.
- Pokud si nejste jisti, zda váš fyziologický zdravotní stav umožňuje použití funkcí přístroje, konzultujte možnosti použití před prvním použitím se svým lékařem.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
- **Produkt není zdravotnický prostředek.**



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax ShiatsuMax Universal vám poskytne příjemnou uvolňující relaxaci celého těla. Masážní mechanismus věrohodně simuluje pohyb rukou skutečného maséra. Masážní hlavice uvolní svalové napětí pomocí hnětací masáže. Úleva od bolesti se dostaví okamžitě! Ergonomický tvar a optimální velikost umožňuje snadné použití na celém těle. Ideální pro masáž krku, ramen, zad a nohou. BeautyRelax ShiatsuMax Universal má funkci vyhřívání pro účinné prohřátí svalových vláken. Integrovaná rukojeť pro snadné přenášení. Dva směry pohybu masážních hlavice. Časovač.

OBSAH BALENÍ

- Masážní polštářek BeautyRelax BR-2952 SHIATSUMAX UNIVERSAL
- Napájecí adaptér 220V
- Návod k obsluze

HLAVNÍ VÝHODY

- Příjemná relaxační masáž pro uvolnění zatuhlých svalů
- Ideální pro použití na oblast krku, ramen, bederní páteře nebo nohou
- Vysoce účinná Shiatsu masáž simuluje pohyby rukou maséra
- Dvě masážní hlavice složené z menších hlavice, které nahrazují skutečné prsty maséra
- Vyhřívání
- Časovač: automatické vypnutí po 15 minutách
- Velmi prodyšný materiál příjemný na dotyk
- Materiál: kombinace syntetické kůže a tkaniny
- Výkon: 24W
- Napájení: síťovým adaptérem 220V
- Rozměry: 38x28x12cm
- Hmotnost: 1,9kg






PŘEDNÍ STRANA
UNIKÁTNÍ ERGONOMICKÉ
TVAROVÁNÍ



ZADNÍ STRANA
PEVNÉ POLSTROVÁNÍ PRO
DLOUHOU ŽIVOTNOST



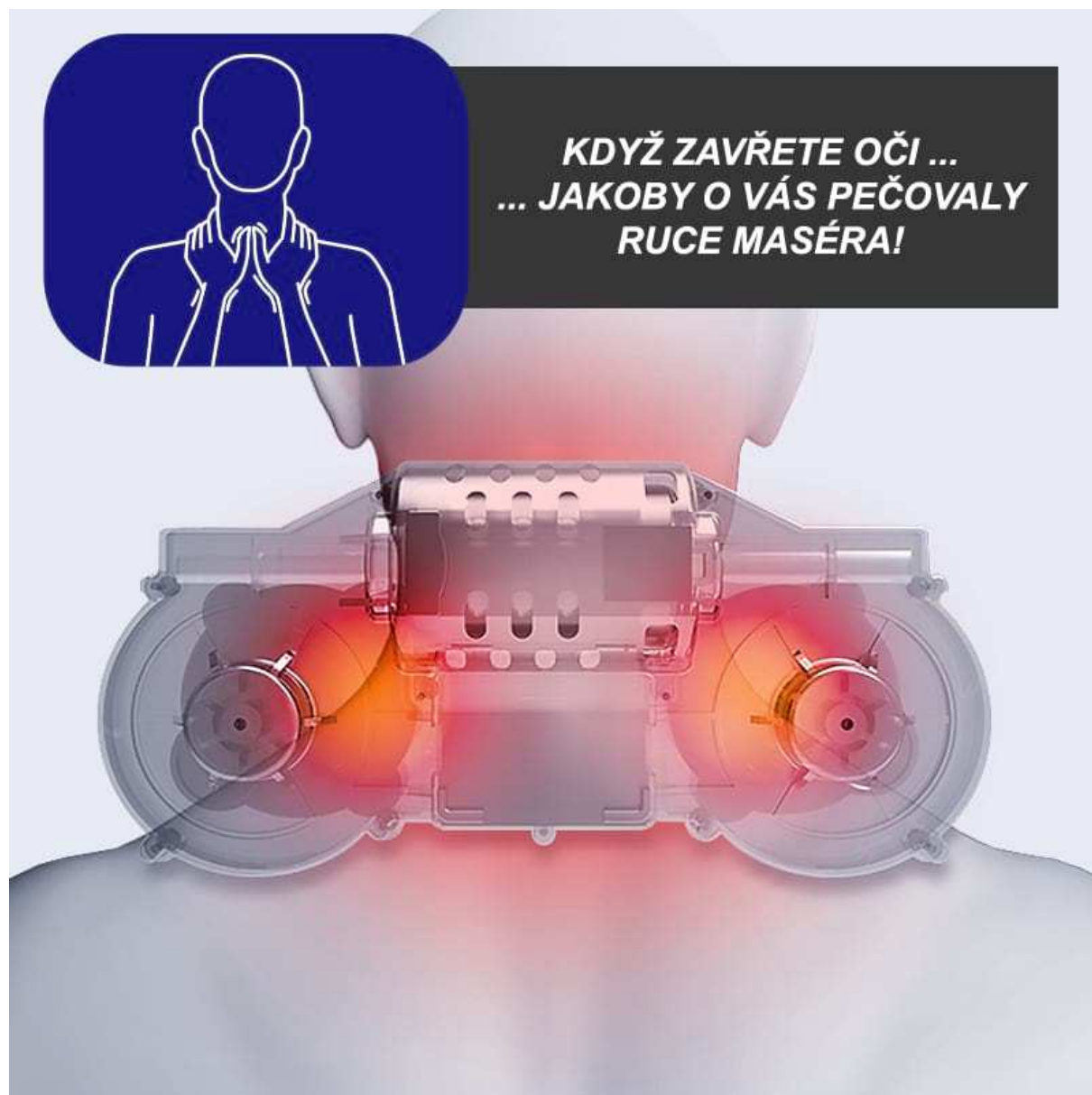

**ERGONOMICKÝ
TVAR
POUŽITÍ
NA CELÉ
TĚLO**



KRČNÍ PÁTEŘ



BEDERNÍ PÁTEŘ



NOHY



BŘICHO





**OKAMŽITÉ UVOLNĚNÍ
KRČNÍCH SVALŮ A RAMEN
SOUČASNĚ!**









NOVÁ GENERACE PŘÍSTROJE **DLOUHÁ ŽIVOTNOST** **PŘÍJEMNÉ A KOMFORTNÍ POUŽÍVÁNÍ**

VYSOKÁ UŽITNÁ HODNOTA VE SROVNÁNÍ SE STARŠÍMI MODELY

**NOVÁ GENERACE
ELEKTROMOTORU**
S EXTRÉMNĚ DLOUHOU
ŽIVOTNOSTÍ A STÁLÝM VÝKONEM





JEMNÁ TKANINA
DRŽÍ TVAR
PŘÍJEMNÁ A ŠETRNÁ
K VAŠÍ POKOŽCE




ROZMĚRY

MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

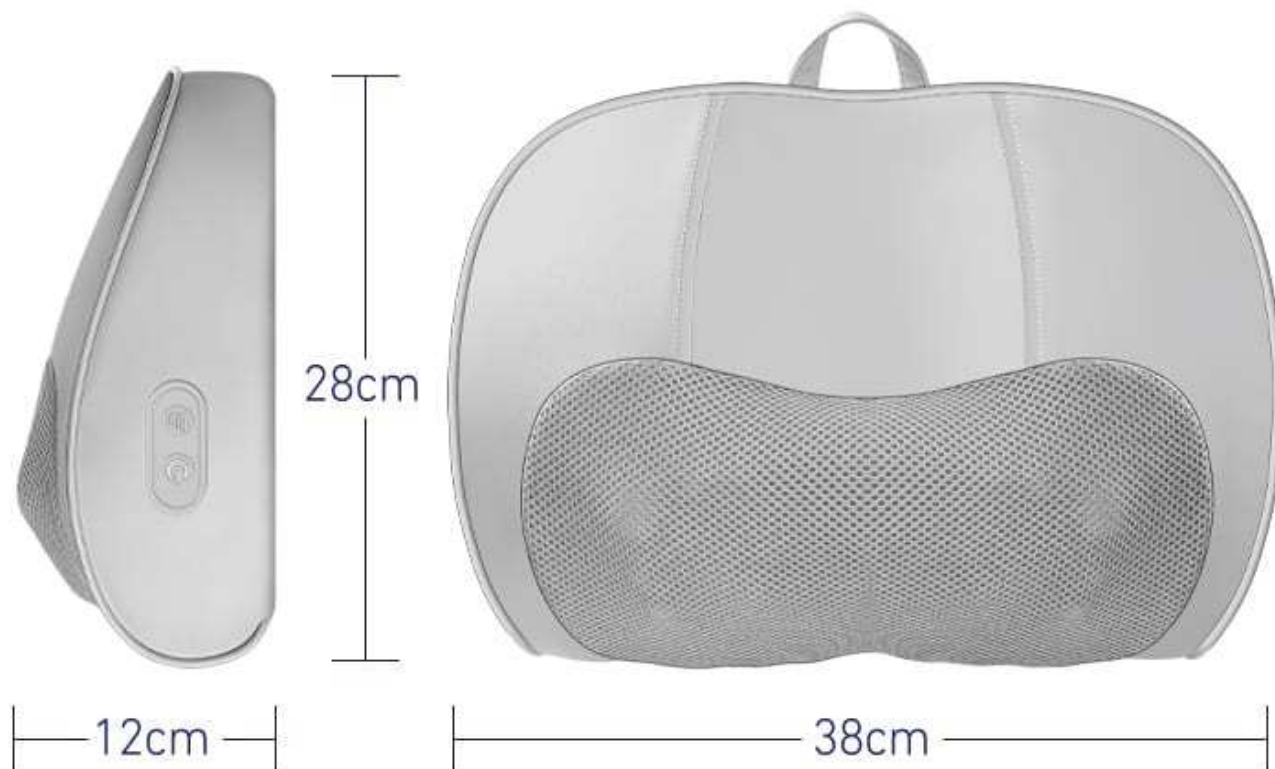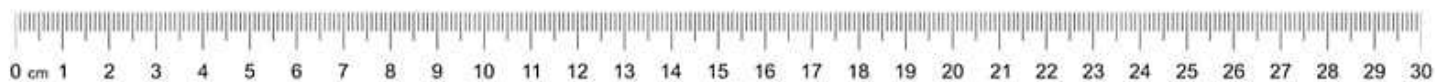


POPIS PŘÍSTROJE

1. Připojení napájecího kabelu 220V
2. Ovládací panel
3. Masážní plocha přístroje

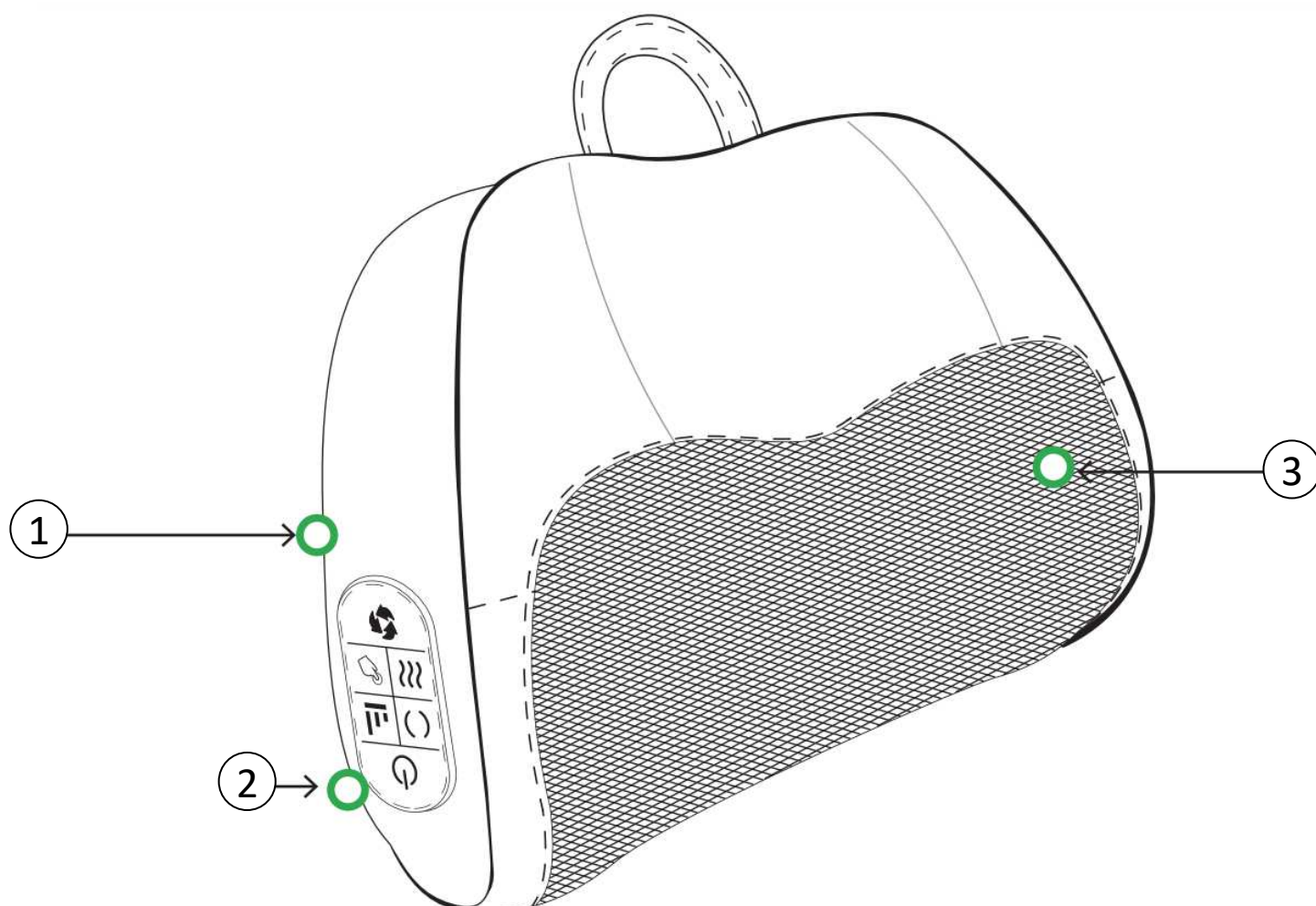

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko **ECO REŽIM**
2. Tlačítko **MASÁŽNÍ PROGRAM**
3. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
4. Tlačítko **RYCHLOST MASÁŽE**
5. Tlačítko změna směru pohybu masážních hlavice
6. Tlačítko **ON/OFF**

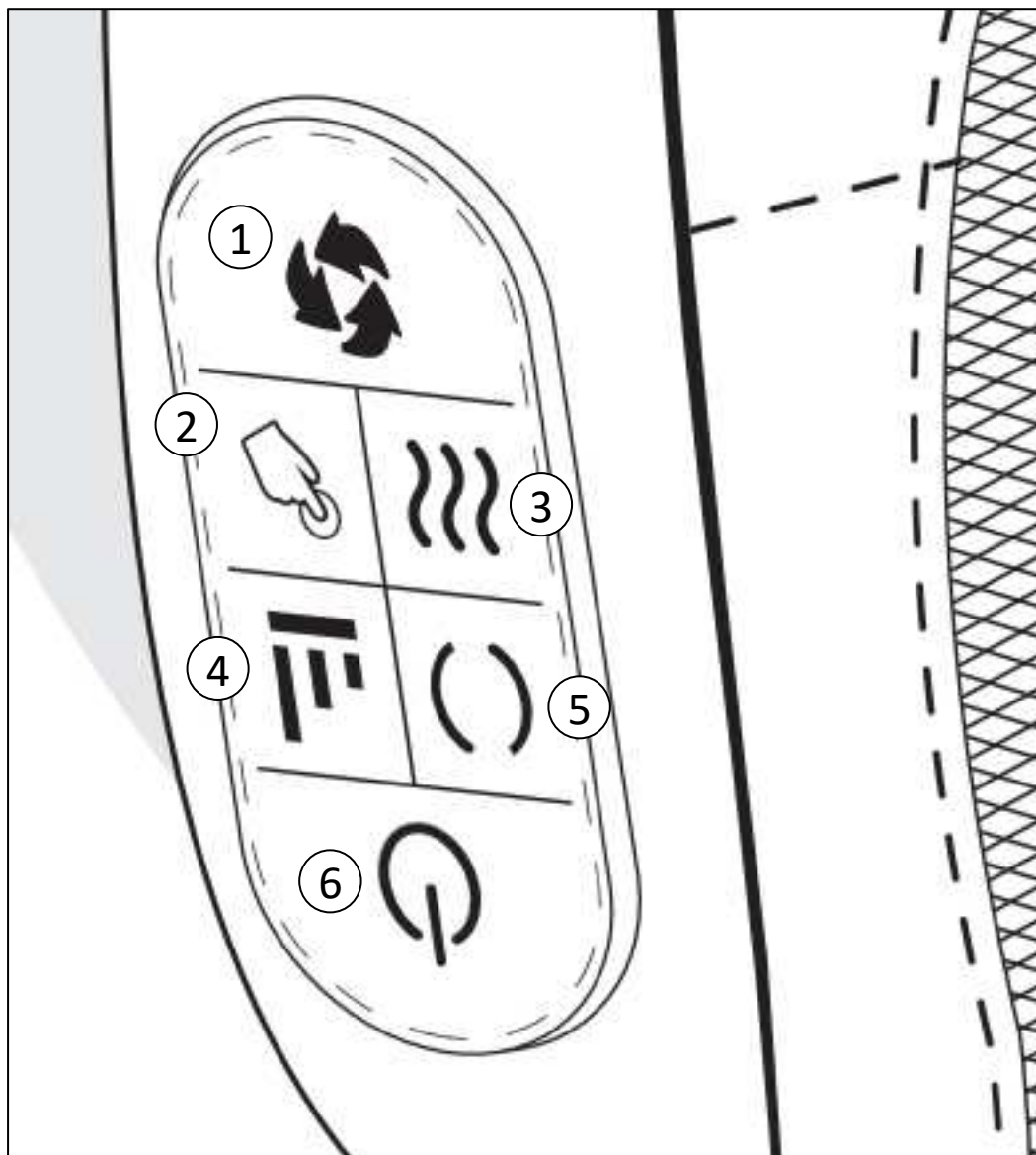

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE


1. Připojte masážní přístroj k napájecímu adaptéru.
2. Vždy zvolte takové místo použití, aby se elektrická síť nacházela ve vaší blízkosti. Kabel napájecího adaptéru by neměl být příliš napnutý. V případě potřeby použijte prodlužovací kabel elektrické sítě (není součástí balení).
3. Masážní přístroj aplikujte na tělo dle vaší potřeby. Přístroj má univerzální použití. Můžete se užívat příjemnou uvolňující masáž pro oblast krční páteře, ramen, horní části zad, oblast beder, lýtek nebo chodidel. V případě použití na chodidla nikdy na přístroji nestůjte plnou vahou.
4. Polštářek si umístěte tak, aby masážní hlavice co nejlépe působily na partii se ztuhlými svaly. V případě potřeby otočte polštářek o 180°.
5. Jednotlivé funkce přístroje můžete snadno nastavit pomocí tlačítek na ovládacím panelu umístěný na boční straně přístroje.
6. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF** (6).
7. Pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** (3) si můžete zapnout nebo vypnout funkci působení tepla. Pokud je funkce aktivní, masážní mechanismus svítí červeně.
8. Pomocí tlačítka **RYCHLOST** (4) si můžete nastavit rychlost pohybu masáže. K dispozici jsou 3 úrovně - **nízká**, **střední**, **vysoká**. Nastavte si takovou rychlost, která je vám nejvíce příjemná.
9. Pomocí tlačítka **MASÁŽNÍ PROGRAM** (2) si můžete masážní program. Změna se projeví ve způsobu pohybu masážních hlavic. Různé masážní programy nabízí různé možnosti pohybu hlavic v různých intervalech. Nastavte si takový program, který je vám nejvíce příjemný.
10. V případě potřeby si můžete aktivovat režim **ECO**. Výkon masážního přístroje se sníží za účelem minimální spotřeby elektrické energie. Masážní přístroj má v normálním režimu použití velmi nízkou spotřebu energie. Doporučujeme tedy využít plné funkce přístroje.
11. Masážní přístroj má přednastavený časovač v délce 15 minut. Po uplynutí času se činnost zastaví. Pokud si přejete pokračovat v masáži, znovu přístroj aktivujte.
12. Není doporučeno používat přístroj souvisle déle než 30 minut.
13. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF** (6).

JE DOBRÉ VĚDĚT

Masážní polštářek můžete používat vsedě nebo vleže. Pokud budete na polštářku ležet v horizontální poloze, budete na něj působit tlakem váhy svého těla a masáž bude maximálně intenzivní! Sílu masáže zmírníte tím, že si sednete do židle nebo křesla. Intenzitu masáže si díky tomu regulujete sami tlakem, kterým na masážní polštářek působíte. Pokud je intenzita masáže přesto silná, vložte mezi záda a polštářek dečku, čímž tlak masážních hlavic zmírníte.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Masážní polštářek můžete používat na následující partie těla:

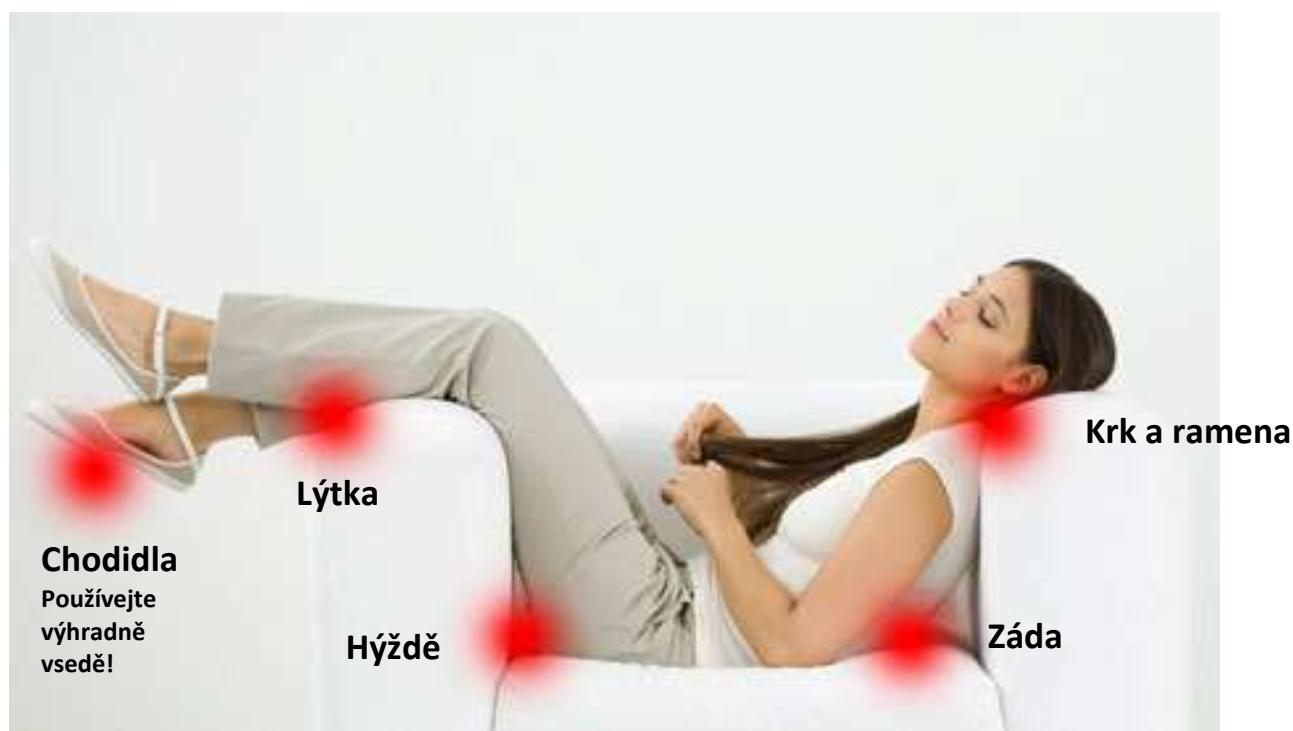

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní polštářek BeautyRelax SHIATSUMAX UNIVERSAL

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2952**

EAN: **8594166122314**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: ATT2020SZ0903074S

Produkt není zdravotnický prostředek.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.3.2023