

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj
BeautyRelax BR-1450

HYPERBLADE



OBSAH:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
KONTRAINDIKACE	6
ÚČEL POUŽITÍ	7
TECHNOLOGIE NMES	8
HLAVNÍ VÝHODY	12
TECHNICKÉ PARAMETRY	12
OBSAH BALENÍ	13
POPIS PŘÍSTROJE	14
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	18
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	19
NABÍJENÍ BATERIE	21
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	21
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	22
CERTIFIKACE	22
DOVOZCE	22
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	23

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Je zakázáno umísťovat aplikátor přístroje na oblast srdce, úst, hlavy, do oblasti genitálií. Aplikátor nepoužívejte na oblasti, které trpí kožními chorobami nebo odřeninami.
- Přístroj se nesmí používat v kombinaci s jinými lékařskými přístroji.
- Přístroj nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Pro zvlhčení pokožky se snažte vyhnout se přípravkům s přidanými aromaty. V kombinaci s funkcí NMES by mohlo dojít k podráždění pokožky nebo vyvolání alergické reakce.
- Přístroj používejte podle přesně daných pokynů v tomto návodu. Přístroj se nesmí používat k jiným účelům než tlumení svalové bolesti a napětí.
- Přístroj sami neopravujte, nerozebírejte, nedemontujte žádnou z jeho součástí. Záruka by tím ztratila platnost a za případně způsobené škody na zdraví či majetku bychom nepřijímali žádnou zodpovědnost.
- Bez předchozího pečlivého prostudování tohoto návodu k obsluze se nesmí přístroj používat.
- Pokud se necítíte při používání přístroje dobře nebo se vyskytnou nečekané zdravotní komplikace, činnost přístroje okamžitě vypněte a další použití konzultujte se svým lékařem.
- Vzhledem k zajištění maximální účinnosti přístroje vypněte veškerá elektronická zařízení, která případně používáte (MP3 přehrávač, mobilní telefon při telefonování).
- Přístroj se nesmí používat ve spánku, kdy nejste schopni mít přístroj plně pod kontrolou. Mohlo by dojít k vážnému zranění.
- Aplikátor nepoužívejte na jednom místě déle než 30 minut.
- Dbejte na to, aby se během používání aplikátor nedostal do kontaktu s kovovými vodivými předměty (řetízky, náramky, prsteny,...). Pro zvýšení bezpečnosti všechny tyto předměty odstraňte.
- Za určitých okolností je možné přístroj používat pouze na účasti fyzioterapeuta.
- Přístroj je určen pouze k vnějšímu použití.
- Přístroj mohou používat pouze osoby ve věkovém rozsahu od 16 do 60 let.
- Přístroj není zdravotnický prostředek.
- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte aplikátor. Ideální je použití čirého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavice.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.
- Přejeme vám hodně úspěchů ve vašem úsilí v rehabilitaci a terapii pro vaše tělo.
Tým BeautyRelax.cz



UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Hyperblade je profesionální masážní přístroj, který vám poskytne skutečně účinnou terapii celého těla. Krční páteř, ramena, stehna, lýtka nebo kolena. Využívá inovativní technologii NMES - revoluční a moderní řešení pro okamžité uvolnění zatuhlých svalů. Zapomeňte na všechny dosavadní masážní přístroje. BeautyRelax Hyperblade je budoucnost, kterou můžete začít používat již dnes!



TECHNOLOGIE NMES

NMES - „neuromuskulární mikroproudá elektrická stimulace“. Speciálně tvarovaný aplikátor, který je v kontaktu s tělem, generuje elektrické pulzy o zcela specifickém výkonu. Výkon a frekvence pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby přes tukovou tkáň pronikly přímo ke svalům. Elektrické pulzy aktivují motorické nervy svalů tak, aby napodobily svalovou kontrakci. Dochází ke zvýšení průtoku krve k namoženým svalům. Technologie NMES má zcela zásadní pozitivní účinek v případech regenerace svalů. Zvýšením lokálního průtoku krve jsou svaly rychleji okysličený a zregenerovány. BeautyRelax Hyperblade je zcela nenahraditelnou pomůckou profesionálních sportovců pro potlačení projevů hromadění kyseliny mléčné po náročném fyzickém výkonu. Funkce NMES se aktivuje automaticky při kontaktu aplikátoru s tělem.


Masážní salony jsou minulost.

Nakročte s BeautyRelax Hyperblade do budoucnosti!

BeautyRelax Hyperblade má speciálně navržený tvar, díky kterému se můžete masírovat sami nebo druhou osobou. Pokud se masírujete sami, budete schopni dosáhnout i na hůře dostupné tělesné partie. Krk, klouby, pas, nohy, paže, ruce, ramena, záda. Na všechny tyto partie se můžete s přístrojem BeautyRelax Hyperblade snadno zaměřit. Unikátní tvar aplikátoru se přizpůsobí všem záhybům těla. Zvyšuje lokální teplotu masírované oblasti. Rozproudění krevního oběhu transportuje k poškozené svalové tkáni více kyslíku a živin. Dochází k násobně rychlejší regeneraci ve srovnání s klasickou ruční masáží.

Poctivá hloubková masáž zacílená na svalovou tkáň

Běžné masážní přístroje působí pouze na svrchní podkožní tkáň epidermis. Nejsou schopny přenést energii do hloubky až přímo ke svalům. BeautyRelax Hyperblade kombinuje dvě technologie: NMES a mikro vibrační oscilace. Díky tomu mohou být uvolněny svaly kdekoli na těle.

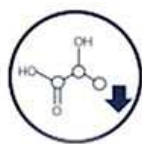

NMES technologie



předání
elektrického pulzu


vzruch pro
motorický nerv


stimulace
svalové kontrakce
zvýšení svalového tonusu

**Napomáhá odplavit kyselinu mléčnou
a urychlit regeneraci svalů**



automatická detekce akupunkturních bodů

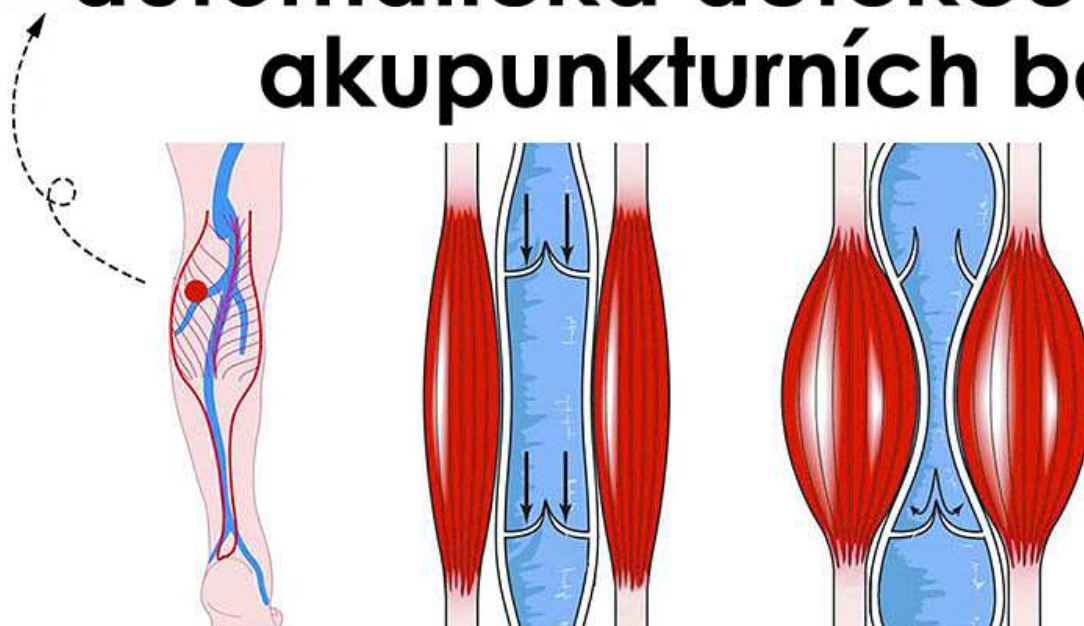

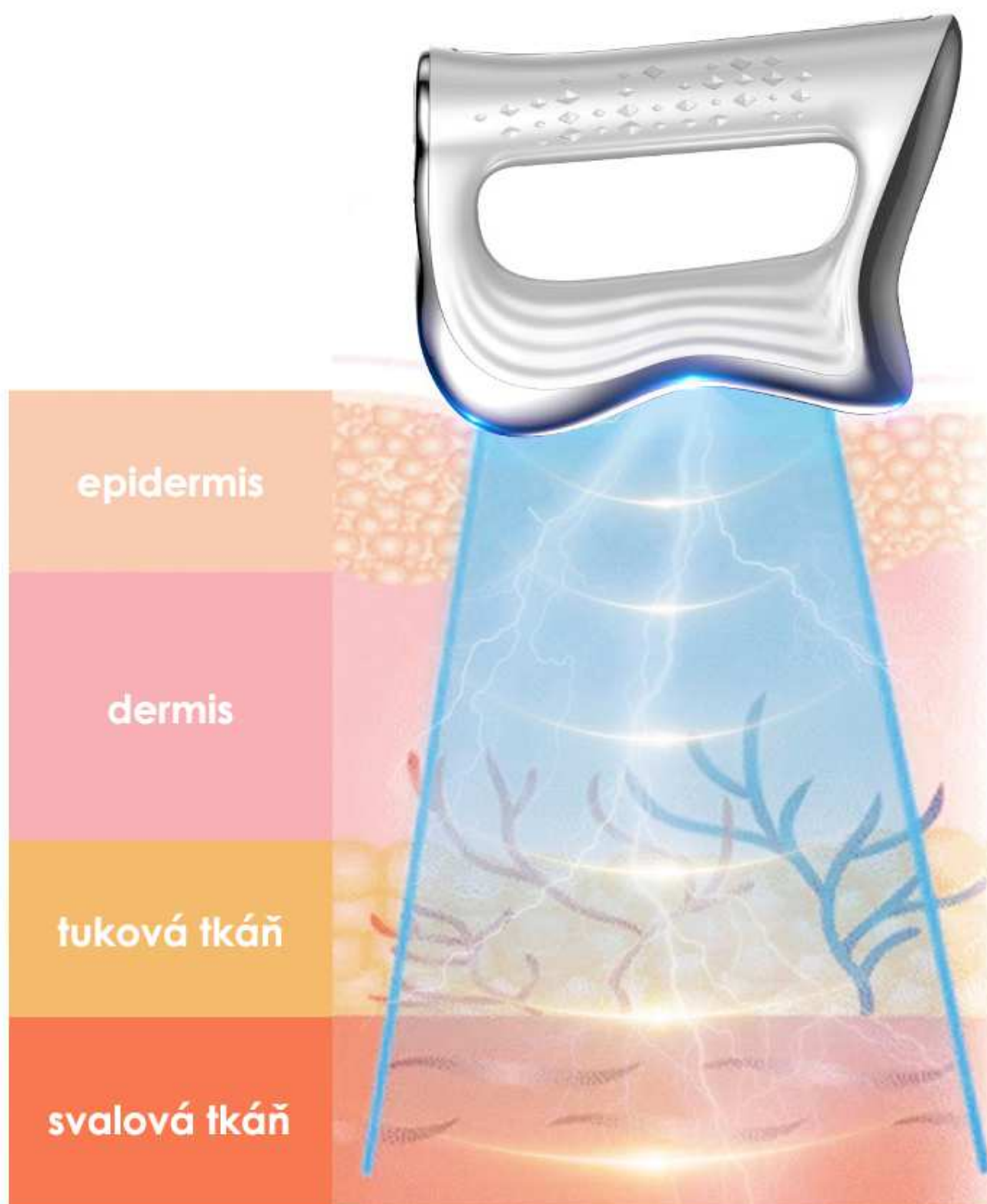

HLAVNÍ VÝHODY

- Vysoce účinná rehabilitační metoda NMES.
- Mikro vibrační oscilace působí hloubkově přímo na svalovou tkáň.
- Okamžité uvolnění zatuhlých svalů.
- Odbourání stresu a duševního napětí.
- Docílíte svěžího pocitu při dlouhodobé trvající únavě.
- Zmírnění otoků zejména v oblasti končetin.
- Regenerace mysli po náročné intelektuální činnosti.
- Snížení bolesti a tuhosti svalů.
- Zlepšení lokálního krevního oběhu.
- Násobné zvýšení rozsahu pohybu.
- Vysoce příznivá terapie pro měkké tkáně.
- Ergonomický tvar maximálně kopíruje záhyby těla.
- Urychlení procesu regenerace svalů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ nabíjecí baterie: nabíjecí Li-ion baterie.
- Kapacita baterie: 1100mAh.
- Na jedno nabití používání až 5 až 7 hodin.
- Čas nabíjení: 4 hodiny.
- 3 rychlostí masáže.
- Provozní napětí: 3,7V.
- Výkon přístroje: 0,5W.
- Nízká hlučnost při používání přístroje.
- Dobíjení baterie pomocí USB kabelu (součástí balení).
- Rozměry: 19,2x14,7x3cm.
- Hmotnost: 227g.

OBSAH BALENÍ



1. Návod k obsluze
2. Masážní přístroj BeautyRelax Hyperblade
3. Dávkovač na vodu
4. Ochranné pouzdro
5. Nabíjecí kabel

POPIS PŘÍSTROJE




1. Držadlo - plocha pro uchopení

- Činnost přístroje se automaticky spustí při uchopení držadla a kontaktu aplikátoru s pokožkou (2).
- Pokud držadlo rukou opustíte, činnost přístroje se zastaví.

2. Kontaktní aplikátor

- Při kontaktu s pletí se automaticky spustí vibrace a funkce NMES a za předpokladu, že zároveň držíte rukou držadlo (1).
- Jakmile aplikátor (2) není v kontaktu s pokožkou, činnost přístroje se zastaví.

POPIS PŘÍSTROJE

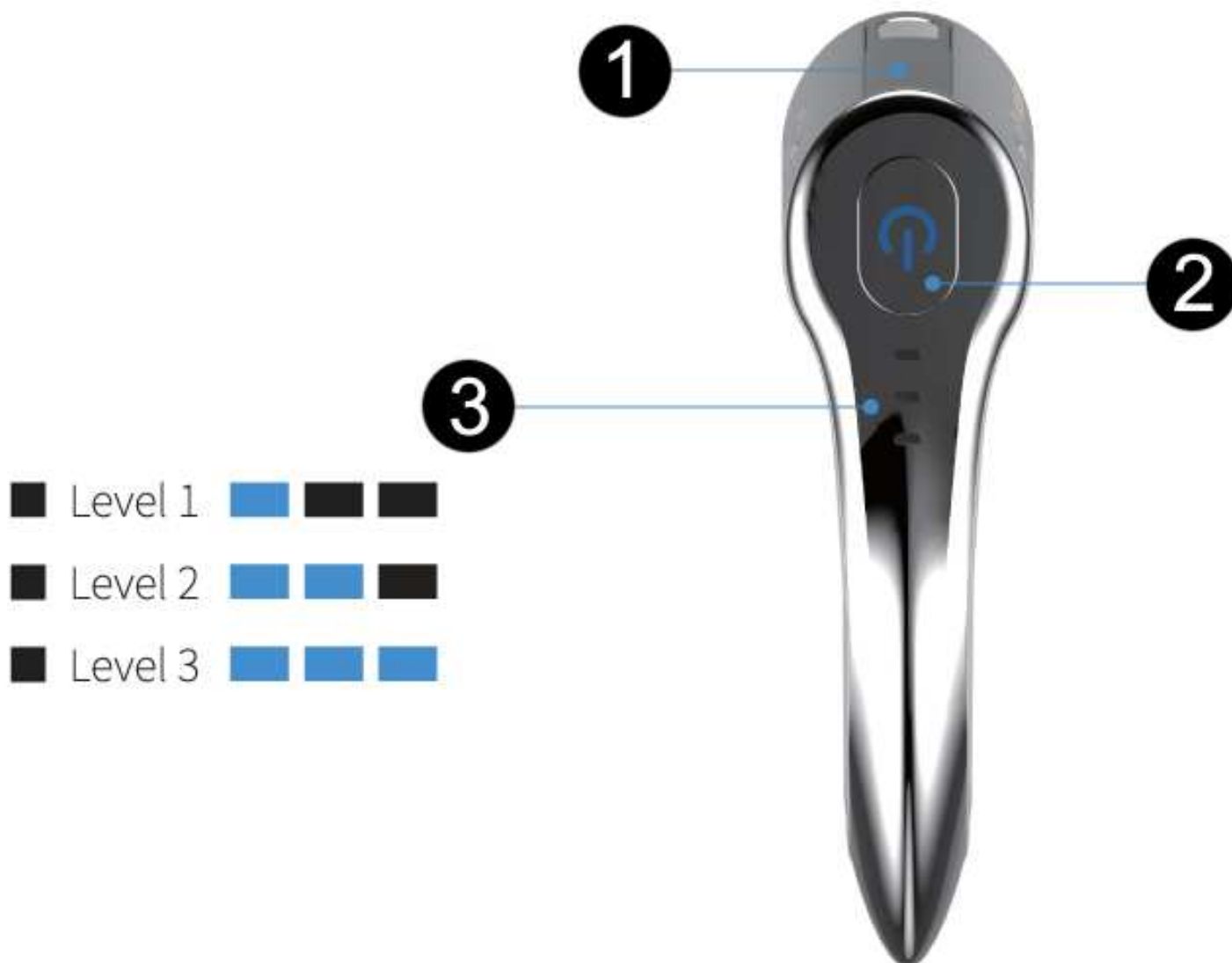

1. Kontaktní pásek

- V držadle je zabudovaný kontaktní pásek.
- Pro správnou činnost funkce NMES se musí vaše ruka při uchopení držadla dotýkat kontaktní plochy.
- V opačném případě nebude funkce NMES fungovat.

2. Tlačítko ON/OFF

- Dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF v délce 3 sekund přístroj zapnete.
- Dalším krátkým stiskem můžete postupně měnit intenzitu masáže.
- Dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF v délce 3 sekund přístroj vypnete.
- Pokud přístroj v pohotovostním režimu nepoužíváte, automaticky se po 1 minutě vypne.
- Během nabíjení bliká kontrolka. Jakmile je baterie nabita, kontrolka se vypne.

3 stupně intenzity individuální nastavení masáže



Výdrž baterie až 14 dní

Při plném nabití baterie přístroj pracuje 4-7 hodin.
30 minut denně po 14 dní.



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE



Pomocí rozprašovače naneste na pokožku vodu nebo jakýkoliv roztok na vodní bázi. Hlavním cílem je zvýšit vodivost pokožky, aby mohly elektrické mikropulzy pronikat lépe přes pokožku a stimulovat svaly.

stiskněte




Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF po dobu 3 sekund. Ozve se zvukový signál a přístroj se aktivuje do pohotovostního režimu.


stiskněte



Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF si můžete nastavit intenzitu masáže. K dispozici jsou celkem 3 úrovně. Vždy začínějte na nejnižší hodnotě. Intenzitu můžete podle vašeho pocitu postupně navyšovat. Přepnutí úrovně intenzity je doprovázeno zvukovým signálem.

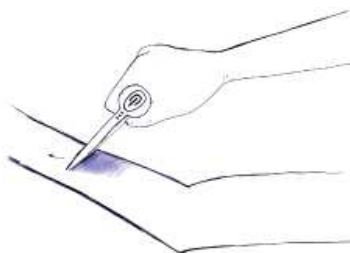

Uchopte pevně přístroj za držadlo. Vždy dbejte na to, aby byla vaše ruka v plném kontaktu s vodícím páskem umístěný na držadle. Přístrojem postupně přejíždějte po těle podle obrázku. Přístroj musí být vždy v plném kontaktu s pletí. V opačném případě nebude fungovat správně.

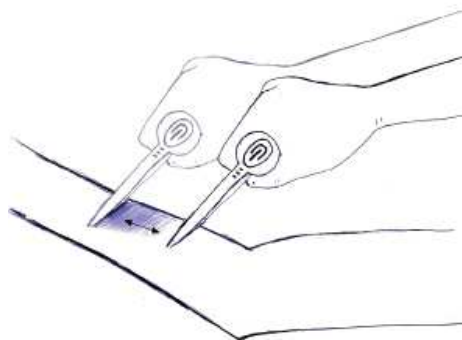

Přístroj je schopen vyhledat automaticky akupunkturální body. Jakmile na ně přístroj narazí, spustí se funkce NMES. V ten okamžik zvýšte mírně tlak na pokožku. Vždy se snažte zaměřit na ty svalové partie, které chcete nejvíce stimulovat. Masírujte dle potřeby. Celková terapie jedné oblasti těla by neměla přesáhnout 30 minut.

stiskněte



Dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF po dobu 3 sekund přístroj vypnete. Přístroj se také automaticky vypne po uplynutí 1 minuty nečinnosti.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. K používání přístroje přistupujte zodpovědně a s maximální koncentrací. Přístroj má v nevyšší úrovni stimulace poměrně velký výkon, aby bylo možné dosáhnout požadovaných výsledků.
2. Vždy začínějte na nejnižší úrovni intenzity 1 a přidávejte postupně. K dispozici jsou celkem 3 úrovně – nejnižší (1), střední (2), nejvyšší (3).
3. Před použitím naneste pomocí dávkovače na pokožku vodu nebo jiný roztok na vodní bázi. Pro správnou funkci NMES je třeba zvýšit vodivost pleti. Násobně tím zlepšíte terapeutický účinek přístroje.
4. Elektrické pulzy se přenáší vždy, pokud je aplikátor v kontaktu s pletí. V opačném případě nebude přenos probíhat.
5. Svaly jsou umístěny v různé hloubce podle tělesné partie, kterou přístrojem stimulujete. Proto můžete působení přístroje vnímat na různých partiích odlišně.
6. Jakmile ucítíte působení NMES elektrických pulzů, přístrojem na danou partii mírně přitlačte. Zvýšíte tak efektivitu používání přístroje.
7. Každým dalším používáním přístroje se budete s funkcemi přístroje a působením na tělo více seznamovat. Patří k tomu i změna úhlu, který aplikátor svírá s pokožkou. Během používání se snažte tento úhel měnit, abyste docílili maximální efektivity.
8. Hlavní předpoklad pro správné používání přístroje spočívá v uzavření okruhu mezi rukou, kterou držíte přístroj a tělesnou partii, kterou chcete ošetřit. Ruka, která uchopí držátko, musí být zároveň v kontaktu s vodícím páskem na držátku. Zakřivený aplikátor musí dosahovat plného kontaktu s pletí.
9. Po použití přístroje vždy důkladně očistěte a osušte aplikátor. Výrazně tím prodloužíte životnost produktu.
10. **Jakmile je přístroj v provozu, tzn. je zapnutý, držíte jej v ruce a přikládáte na různé tělesné partie, můžete v ruce, ve které přístroj držíte, cítit působení elektrických pulzů. Tento jev je naprosto standardní. Mezi tělesnou partií pro ošetření, přístrojem, a rukou, ve které přístroj držíte, proběhne uzavření elektrického obvodu. Tento okruh umožňuje maximální působení NMES elektrických pulzů na ošetřovanou tělesnou partii. Tento je žádným způsobem nemůže poškodit vaše zdraví.**

nejvíce komplexní přístroj



NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Jakmile je baterie vybita, rozbliká se světelná signalizace.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí kabel, který je součástí balení.
2. Jeden konec kabelu zapojte do vstupu pro napájení přístroje na boční straně přístroje.
3. Druhý konec kabelu připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
4. V průběhu nabíjení bliká světelná signalizace.
5. Jakmile je baterie nabita, světelná signalizace přestane blikat.
6. Nabíjení může trvat až 4 hodiny v závislosti na vybití baterie.

Pro nabíjení nepoužívejte síťový adaptér 220V. Mohlo by dojít k fatálnímu poškození baterie a ztratě záruky na přístroj.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikátor kompletně suchý. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní terapeutický přístroj

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1450**

EAN: **8594166116849**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax Hyperblade**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017 EN 61000-2:2019 EN 6100-3-3:2013+A1:2019

EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010

EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014+A1:2017

EN 61000-4-6:2014/AC:2015, EN 61000-4-11:2004+A1:2017

Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: DL-2019103502C

Přístroj není zdravotnický prostředek. V případě používání více osobami je třeba dbát zvýšenou pozornost s hygienickými normami pro přístroje obdobného typu.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 20.6.2020