

NÁVOD K OBSLUZE

Ruční masážní přístroj

BeautyRelax BR-1440

Kineticforce Lite Plus



OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
PRINCIP FUNGOVÁNÍ	5
POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE MŮŽETE DOCÍLIT	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
OBSAH BALENÍ	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ	8
MOŽNOSTI POUŽITÍ	9
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	12
RYCHLOSTI MASÁŽE	13
NABÍJENÍ BATERIE	14
VĚNUJTE POZORNOST	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	15
CERTIFIKACE	15
DOVOZCE	15

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 20 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozornění a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřijímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Masážní přístroj BeautyRelax Kineticforce Lite Plus má unikátní technologické řešení. Aplikační hlavice se pohybuje v optimálně nastaveném rozsahu s variabilní možností nastavení oscilace. Kinetická energie putuje od pokožky, přes tukovou tkáň přímo ke svalům. Působením tlaku si můžete rukou sami regulovat sílu masáže. Intenzitu lze změnit stiskem jednoho tlačítka a to v rozsahu od 1 do 6. Mezi hlavní benefity přístroje patří okamžité uvolnění svalového napětí a celková regenerace těla i mysli.

Vysokou míru univerzálního použití umožňují 4 vyměnitelné aplikátory různých tvarů. Masážní přístroj BeautyRelax Kineticforce Lite Plus je tak skutečným komplexním pomocníkem pro rehabilitaci celého těla. Při vyšších rychlostech masáže napomáhá s odplavením kyseliny mléčné a zmírnění zánětů, které vznikají ve svalech v důsledku cvičení nebo zvýšené sportovní aktivity.

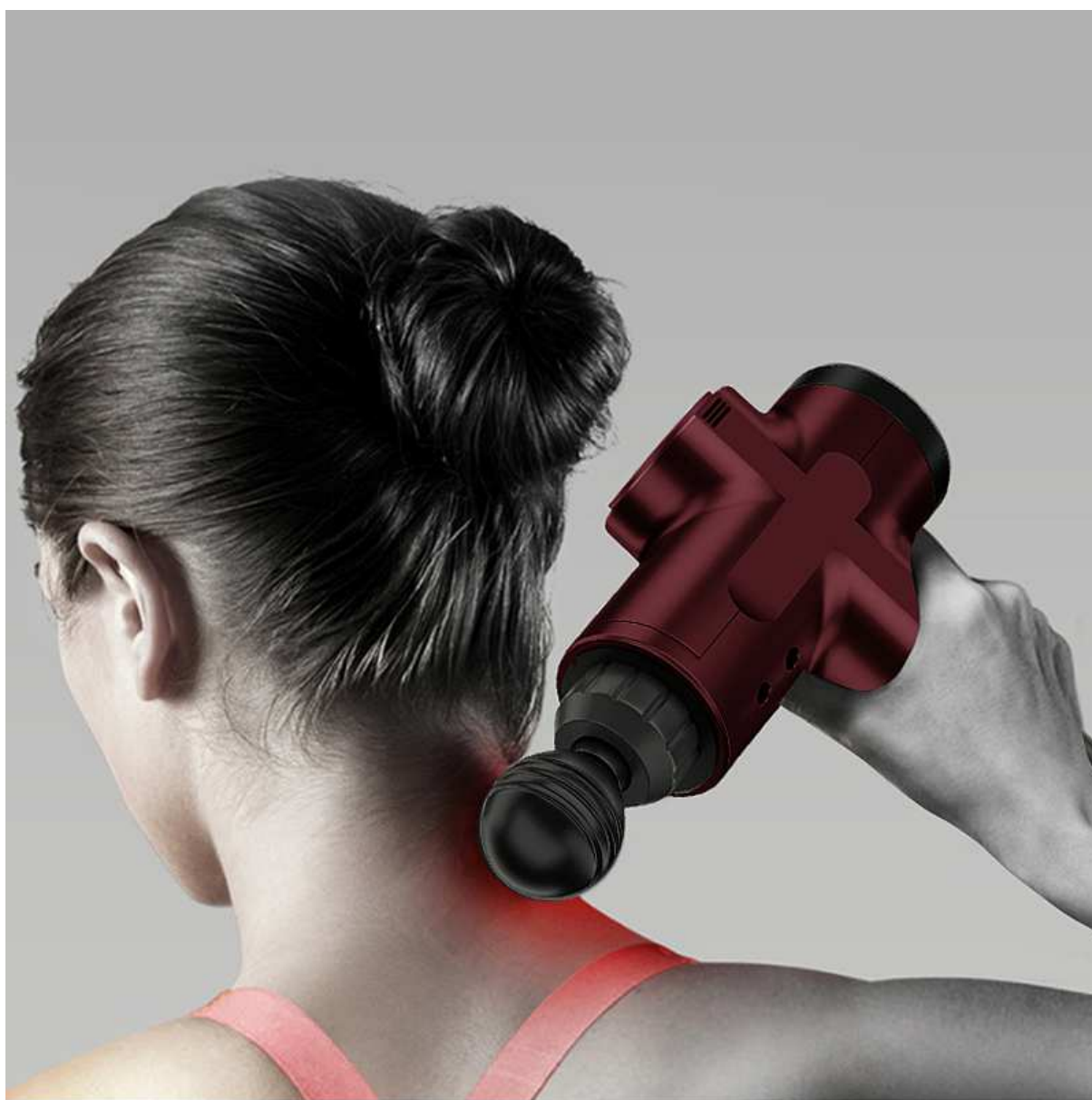

POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE MŮŽETE DOCÍLIT

- Okamžitého uvolnění zatuhlých svalů.
- Odbourání stresu a duševního napětí.
- Svěžího pocitu při dlouhodobé trvající únavě.
- Zmírnění otoků zejména v oblasti končetin.
- Regenerace mysli po náročné intelektuální činnosti.
- Hlubkové svalové relaxace.
- Snížení bolesti a tuhosti svalů.
- Zlepšení lokálního krevního oběhu.
- Násobné zvýšení rozsahu pohybu.
- Vysoce příznivé terapie pro měkké tkáně.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ nabíjecí baterie: nabíjecí Li-ion baterie.
- Kapacita baterie: 2000mAh.
- Na jedno nabití používání až 2 hodiny.
- Čas nabíjení: až 3 hodiny.
- 6 rychlostí masáže (2600 až 4100 kmitů za minutu).
- 4 vyměnitelné hlavice.
- Nízká hlučnost při používání přístroje.
- Provozní napětí: 7,4V.
- Dobíjení baterie pomocí adaptéru 220V (součástí balení).
- Rozměry: 35x24,5x11cm.
- Hmotnost: 2kg.

OBSAH BALENÍ

- 1x Masážní přístroj BeautyRelax Kineticforce Lite Plus.
- 4x Vyměnitelné aplikátory různých tvarů.
- 1x Nabíjecí adaptér ze sítě 220V.
- 1x Návod k obsluze.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice
2. Ukazatel rychlosti (1-6)
3. Tlačítko ON/OFF
4. Vstup pro napájecí kabel
5. Baterie / rukojeť přístroje
6. Vyměnitelné aplikátory (4ks)



POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ

**4 RŮZNÉ
APLIKÁTORY**



ZÁDA



KLOUBY



BŘICHO




KONČETINY




- 1. Vidlička** - oblast kolem páteře
- 2. Projektilová hlavice** - oblast kolen, kloubů a hůře dostupných míst
- 3. Plochá hlavice** - vhodné pro všechny části těla (břicho, končetiny...)
- 4. Velká kulička** - vhodné pro končetiny a velké skupiny svalů

MOŽNOSTI POUŽITÍ



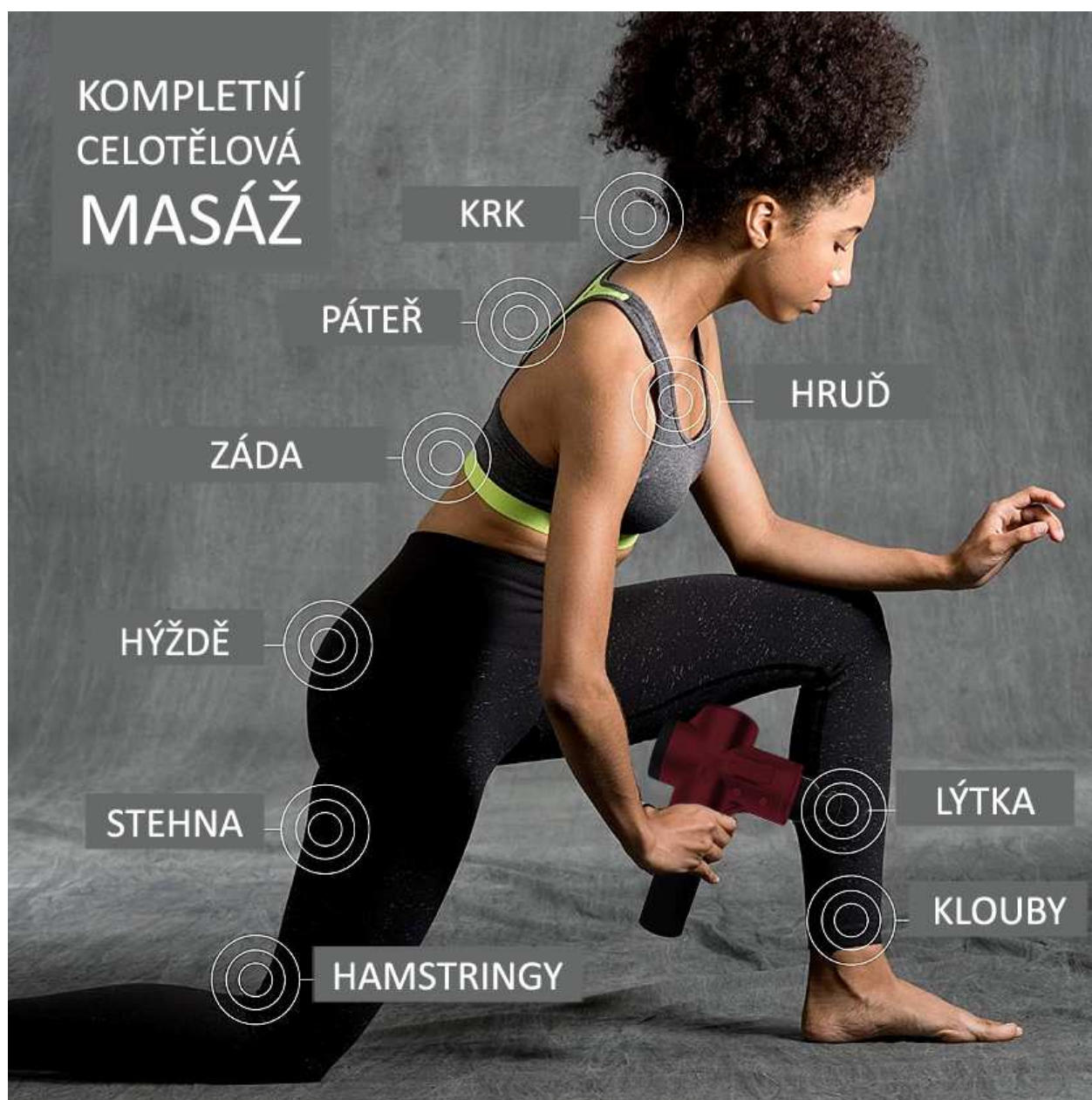

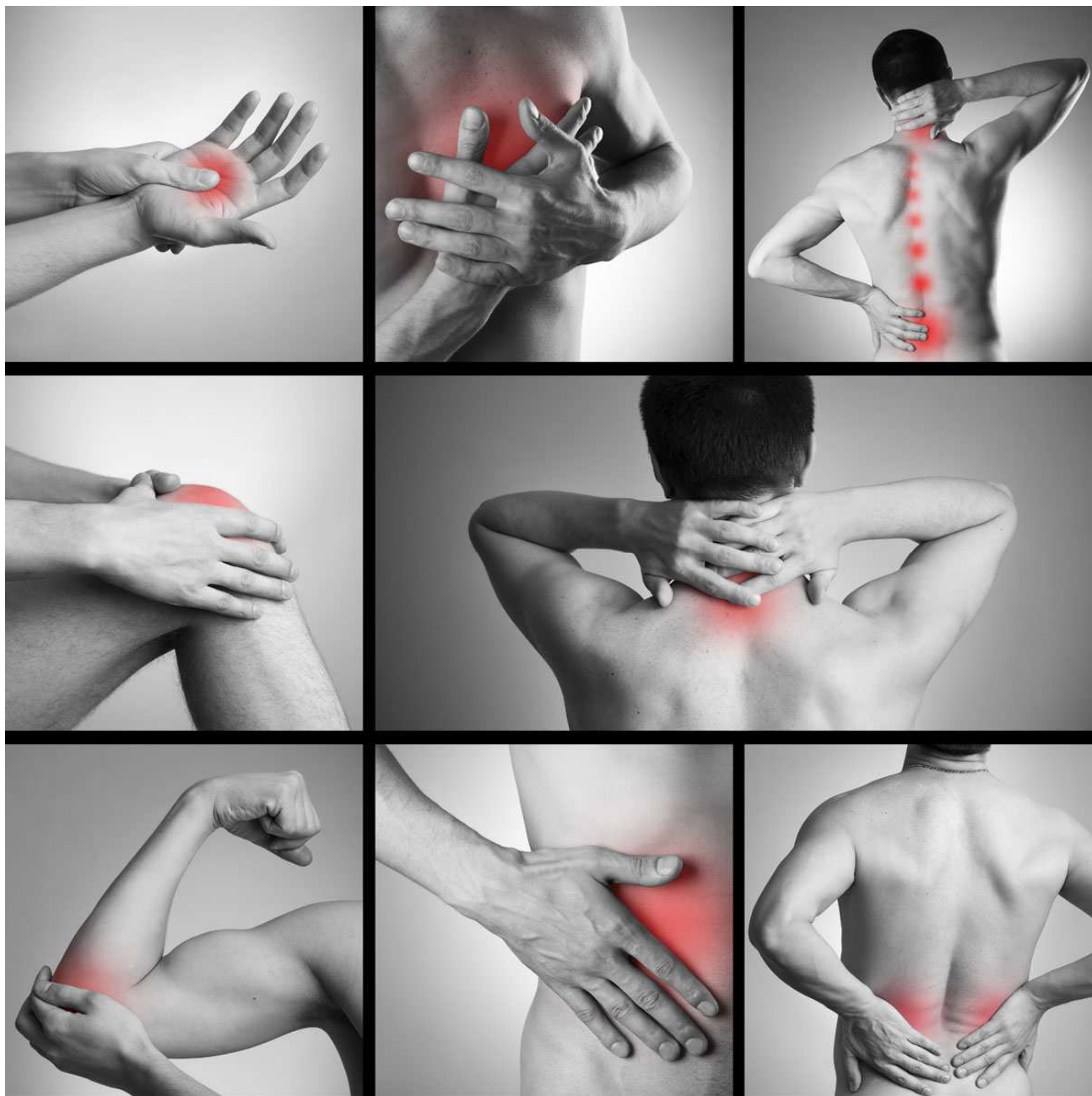

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Podle účelu použití si zvolte jeden ze 4 aplikátorů.
2. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka **ON/OFF**.
3. Aplikační hlavice se začne automaticky pohybovat nejnižší rychlostí č. 1.
4. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** si můžete postupně měnit rychlosti pohybu aplikační hlavice. K dispozici je celkem 6 rychlostí.
5. Při rychlosti č. 6 stiskněte tlačítko **ON/OFF** a přístroj se vypne.
6. Přístroj pracuje v délce 10 minut. Poté dojde k automatickému vypnutí. Pokud budete chtít dále pokračovat v používání přístroje, přístroj znovu zapněte.

Kineticforce Lite Plus

nejvíce komplexní terapeutický přístroj



RYCHLOSTI MASÁŽE

6 rychlostí masáže

1. **rychlostní stupeň** - jemná - relaxační masáž
2. **rychlostní stupeň** - měkká - probuzení svalů
3. **rychlostní stupeň** - mírná - příjemná relaxace
4. **rychlostní stupeň** - silnější - rozklad kyseliny mléčné
5. **rychlostní stupeň** - velmi silná - hloubková masáž
6. **rychlostní stupeň** - nejsilnější - intenzivní poklepová masáž

NABÍJENÍ BATERIE

1. Přístroj nabíjejte výhradně adaptérem, který je součástí balení.
2. V průběhu nabíjení svítí LED signalizace na síťovém adaptéru červeně.
3. Jakmile je baterie plně nabita, červená barva na síťovém adaptéru se změní na zelenou.
4. Baterii můžete nabíjet kdykoliv budete mít možnost.
5. Přístroj vydrží na jedno nabití až 2 hodiny v závislosti na rychlosti zvolené masáže.
6. Délka nabíjení může trvat až 3 hodiny v závislosti na vybití baterie.

VĚNUJTE POZORNOST

1. Při výměně aplikační hlavice vždy dbejte na to, aby byla co nejpevněji zatlačena do otvoru, který je pro aplikátor určen.
2. Přístroj nepoužívejte v kuse déle než 1 hodinu. Mohlo by dojít k jeho výraznému zkrácení životnosti.
3. Jakmile je baterie nabita a rozhodnete se přístroj začít používat, vždy odpojte napájecí kabel.
4. Sílu masáže si můžete volit sami tlakem, kterým budete na jednotlivou tělesnou partii působit. Mějte vždy na paměti, že celkovou intenzitu masáže vždy tvoří síla, kterou působíte na danou tělesnou partii a rychlost, kterou si nastavíte.
5. Zpočátku používání přístroje začínajte vždy na nižších hodnotách rychlosti masáže.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.