

NÁVOD K OBSLUZE

Ruční masážní přístroj

BeautyRelax BR-1605

KineticForce Slim



OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
PRINCIP FUNGOVÁNÍ	5
VLASTNOSTI&SPECIFIKACE	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
OBSAH BALENÍ	5
POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	8
MOŽNOSTI POUŽITÍ	9
PŘÍKLADY POUŽITÍ	12
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	13
NABÍJENÍ BATERIE	13
VĚNUJTE POZORNOST	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	14
CERTIFIKACE	14
DOVOZCE	14
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	15

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 20 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozornění a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřijímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Ruční masážní přístroj Beautyrelax Kineticforce Slim je naprosto revoluční a inovativní řešení, které změní váš pohled na celkovou rehabilitaci a regeneraci těla. Přístroj byl navržen profesionálními terapeuty. Při vývoji byl kladen důraz na špičkovou kvalitu a maximální účinnost. Aktuálně neexistuje na trhu efektivnější přístroj srovnatelných kvalit. Beautyrelax Kineticforce Slim ihned uvolní zatuhlé svaly kdekoli na těle. Dopřejte vašemu tělu blahodárné účinky moderní technologie! Díky kompaktním rozměrům může být přístroj s vámi kdekoli na cestách.

VLASTNOSTI&SPECIFIKACE

- Okamžité uvolnění zatuhlých svalů
- Odbourání stresu a duševního napětí
- Svěží pocit při dlouhodobé trvající únavě
- Lokální zlepšení krevního oběhu
- Zmírnění otoků zejména v oblasti končetin
- Regenerace mysli po náročné intelektuální činnosti


TECHNICKÉ PARAMETRY

- Zaoblený tvar přístroje pro snadnou obsluhu
- Extrémně nízká hlučnost provozu
- 4 vyměnitelné aplikační hlavice
- 3 rychlosti masáže
- Provozní napětí: 12,6V
- Nabíjení: vestavěná baterie Li-ion 2000mAh
- Napájení: síťový adaptér 220V (součástí balení)
- Rozměry: 35x25x5cm
- Hmotnost: 1,5g


OBSAH BALENÍ

- 1x Ruční masážní přístroj BeautyRelax Kineticforce Slim
- 4x Vyměnitelné aplikátory různých tvarů
- 1x Nabíjecí adaptér 220V
- 1x Pouzdro
- 1x Návod k obsluze


POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ

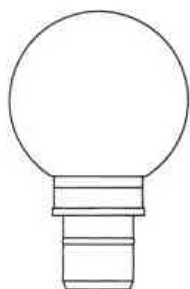

1

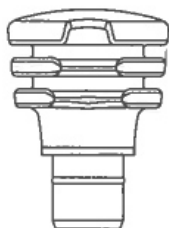

2

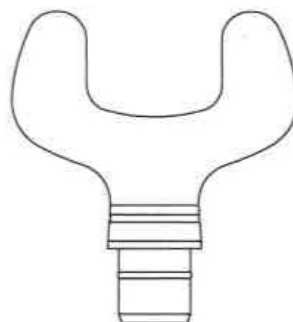

3



4


1. Kulatý aplikátor – vhodný pro velké skupiny svalů

2. Plochá hlavice – vhodná pro všechny části těla

3. Vidlička – ideální na oblast kolem páteře


4. Projektilová hlavice – oblast kolenou a hůře dostupných míst

POPIS PŘÍSTROJE

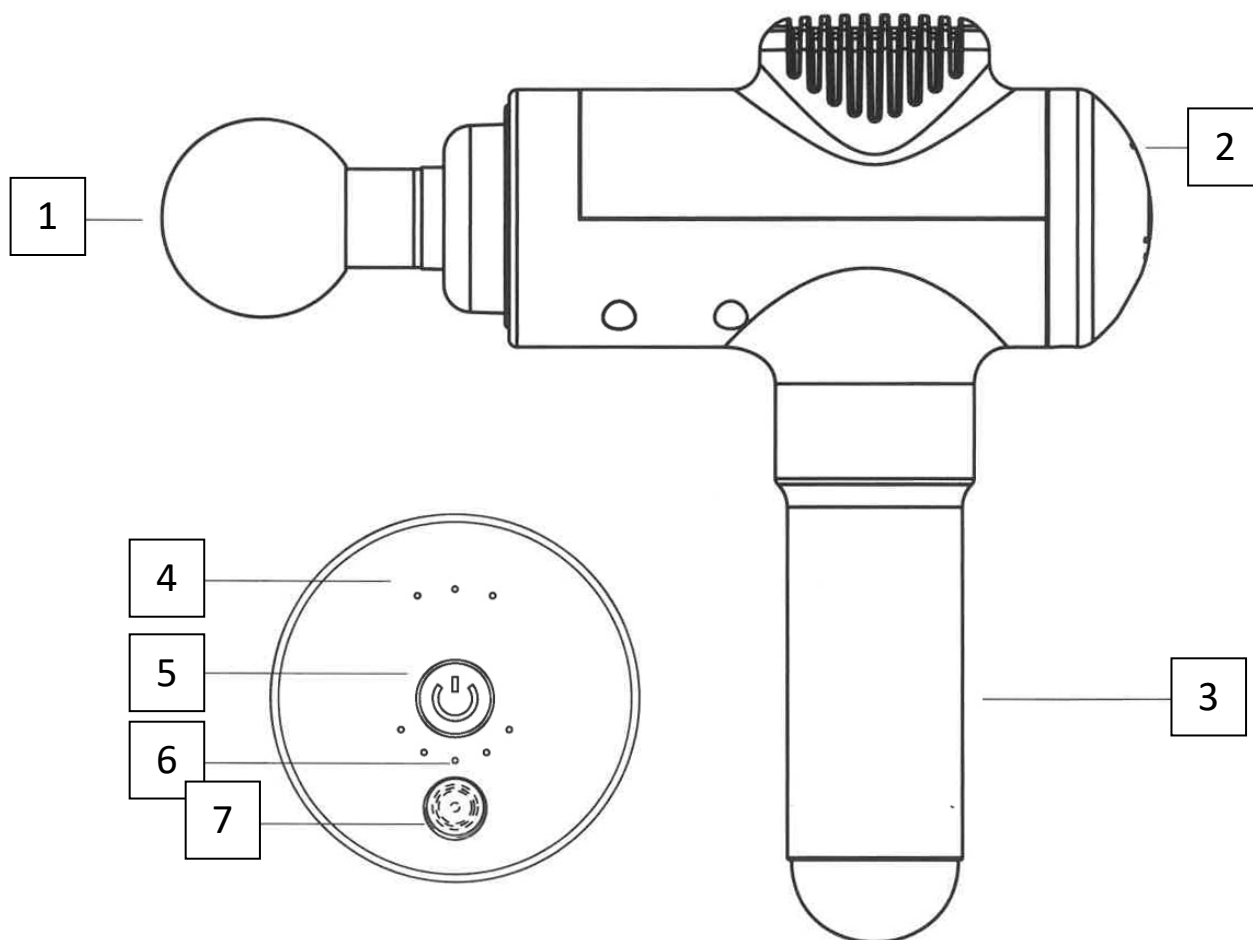

1. Aplikační hlavice
2. Ovládací panel
3. Rukojeť
4. Indikace rychlosti masáže
5. Tlačítko ON/OFF/Změna rychlosti
6. Indikace stavu baterie
7. Vstup pro napájecí adaptér

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

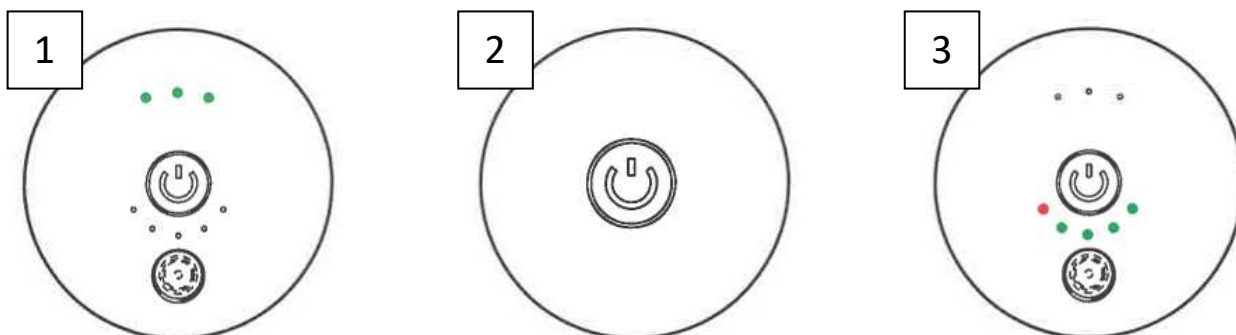

1. Indikace rychlosti masáže
rychlost 1 - 1400 kmitů za minutu
rychlost 2 - 2100 kmitů za minutu
rychlost 3 - 2800 kmitů za minutu

2. Tlačítko ON/OFF/Změna rychlosti
3. Indikace stavu baterie

MOŽNOSTI POUŽITÍ



příjemné svalové uvolnění



relaxace po náročné práci



regenerace dušení únavy



rehabilitace problematických partií



svalová terapie jako od maséra

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Při použití přístroje se můžete zaměřit na následující partie. Vždy začínejte s nejnižší rychlostí masáže. Intenzitu přidávejte postupně. Stejným způsobem postupujte při rozložení tlaku přístroje na vybranou tělesnou partii. Na citlivějších místech použijte nižší míru tlaku. Na partie s větší svalovou strukturou se nebojte více přitlačit. Zvolte aplikační hlavici, která vám bude nejvíce vyhovovat.



POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Podle účelu použití si zvolte jeden ze 4 aplikátorů.
2. Při výměně aplikátoru dbejte na to, aby byl dostatečně doražen do pohyblivé hlavičky přístroje. Pokud je těsnicí kroužek opotřebený, vyměňte za nový.
3. Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** uvedete přístroj do pohotovostního režimu. Rozsvítí se světelná indikace stavu baterie.
4. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** zapnete rychlost masáže na stupeň 1.
5. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** zapnete rychlost masáže na stupeň 2.
6. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** zapnete rychlost masáže na stupeň 3.
7. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** uvedete přístroj do pohotovostního režimu.
8. V pohotovostním režimu stiskněte dlouze tlačítko **ON/OFF**. Přístroj se vypne.

NABÍJENÍ BATERIE

1. Přístroj nabíjejte výhradně síťovým adaptérem, který je součástí balení.
2. Konektor napájecího adaptéru připojte do zdířky v ovládacím panelu přístroje.
3. Průběh nabíjení indikují pulzující LED světla. Jakmile je baterie nabita, pulzování ustane.
4. LED světla indikují následující stavy baterie:
 - 5 LED světel - 80% až 100% baterie
 - 4 LED světla - 60% až 80% baterie
 - 3 LED světla - 40% až 60% baterie
 - 2 LED světla - 20% až 40% baterie
 - 1 LED světlo - méně než 20% baterie.
5. Baterii můžete nabíjet kdykoliv budete potřebovat bez ohledu na úroveň stavu nabití baterie.
6. V průběhu nabíjení baterie přístroj nepoužívejte.
7. Jakmile úroveň stavu baterie klesne pod 20%, baterii nabíjete. Nedoporučujeme baterii vybitou do absolutního minima.
8. Průměrná výdrž přístroje na jedno nabití závisí na používané rychlosti.

VĚNUJTE POZORNOST

1. Při výměně aplikační hlavice vždy dbejte na to, aby byla co nejpevněji zatlačena do otvoru, který je pro aplikátor určen.
2. Přístroj nepoužívejte v kuse déle než 1 hodinu. Mohlo by dojít k jeho výraznému zkrácení životnosti. Mezi jednotlivým použitím dopřejte pauzu minimálně 30 minut.
3. Jakmile je baterie nabitá a rozhodnete se přístroj začít používat, vždy odpojte napájecí kabel.
4. Sílu masáže si můžete volit sami tlakem, kterým budete na jednotlivou tělesnou partii působit. Mějte vždy na paměti, že celkovou intenzitu masáže vždy tvoří síla, kterou působíte na danou tělesnou partii a rychlost, kterou si nastavíte.
5. Zpočátku používání přístroje začínejte vždy na nižších hodnotách rychlosti masáže.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj BeautyRelax KineticForce Slim

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1605**

EAN: **8594166119574**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN55014-1:2017 EN550-4-2:2015

EN51000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN60335-2-23:2003+A2:2015 EN62233:2008

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.8.2019